


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-1-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-9  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 11:57:28 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:52:48 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

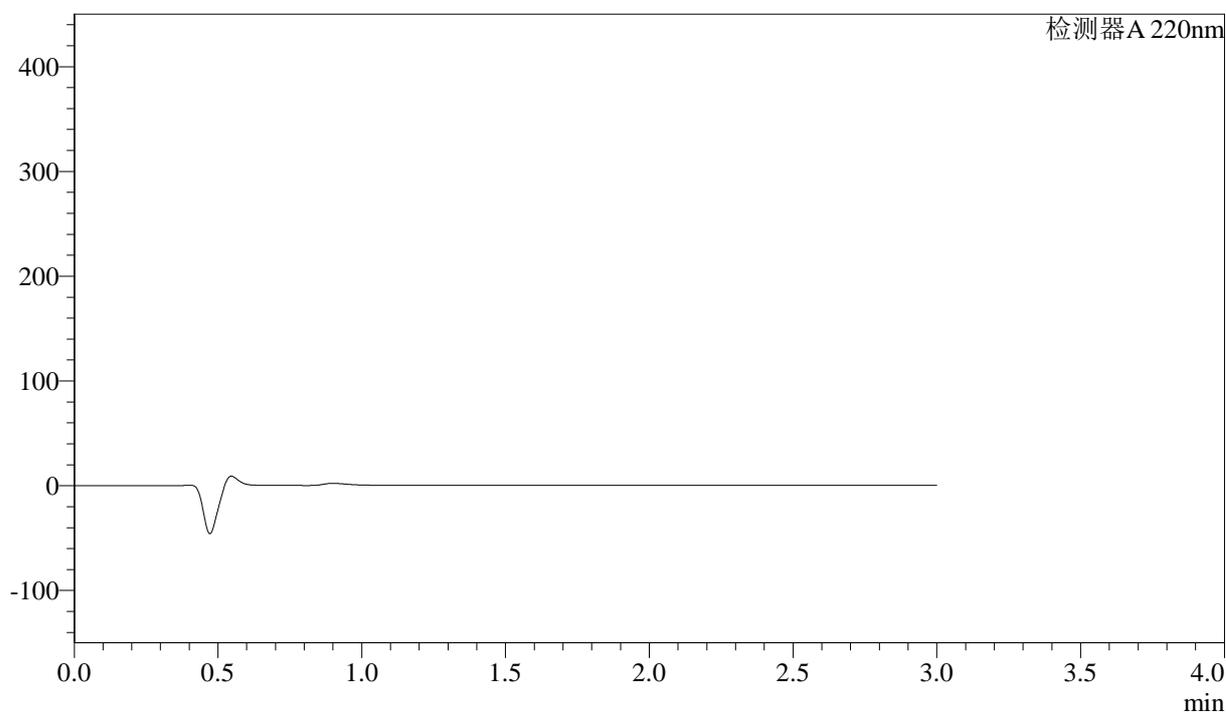

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 高度 | 面积% | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|----|-----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |    |     |            |      |          |


图1 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-浆法-50转  
溶剂

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-2-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 12:00:52 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:52:52 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

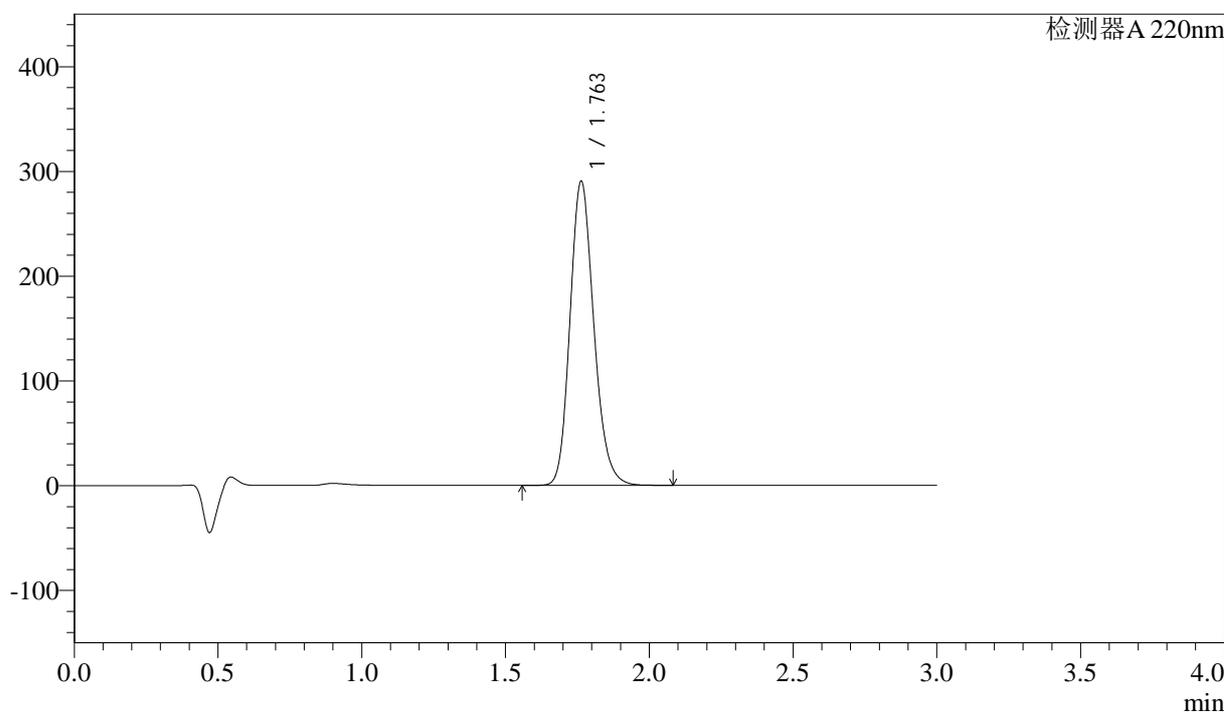

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.763 | 1673656 | 290319 | 100.000 | 2204       | 1.179 | --       |
| 总计 |       | 1673656 | 290319 | 100.000 |            |       |          |


图2 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-3-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 12:04:15 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:52:55 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

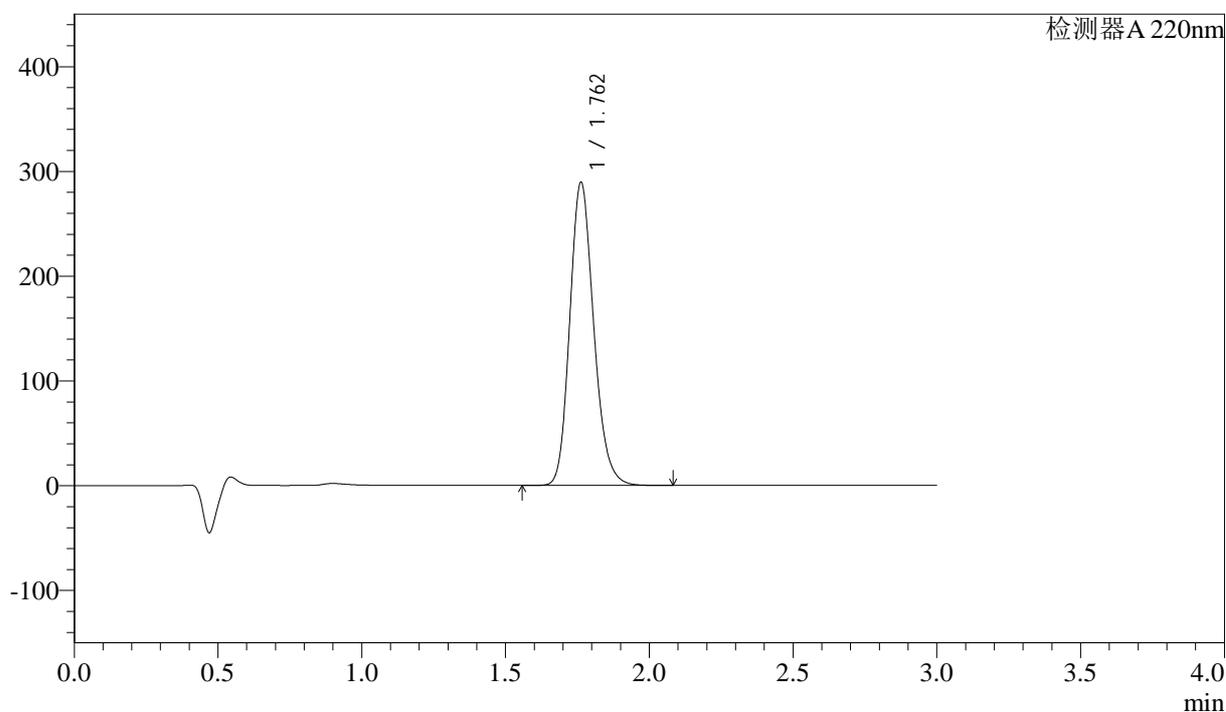

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.762 | 1674193 | 289271 | 100.000 | 2188       | 1.180 | --       |
| 总计 |       | 1674193 | 289271 | 100.000 |            |       |          |


图3 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-2

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-4-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 12:07:39 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:52:57 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

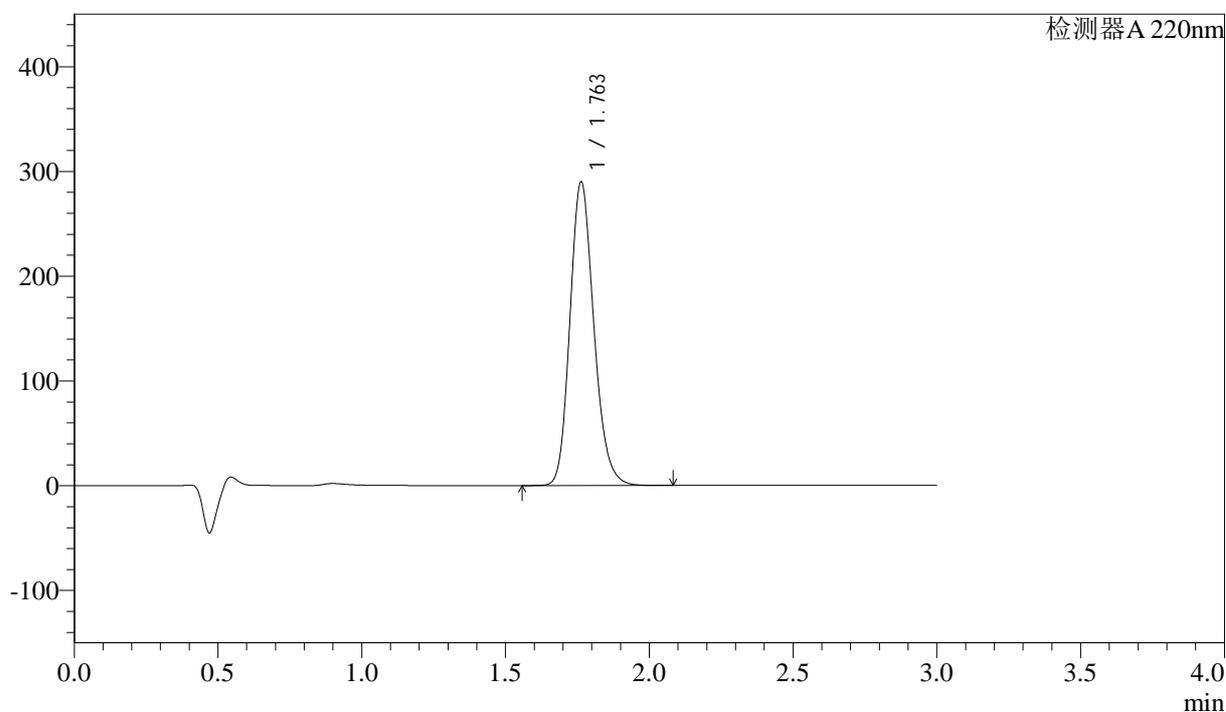

## &lt;峰表&gt;

检测器 A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.763 | 1674662 | 289827 | 100.000 | 2193       | 1.180 | --       |
| 总计 |       | 1674662 | 289827 | 100.000 |            |       |          |


图4 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-3

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-5-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 12:11:02 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:53:00 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

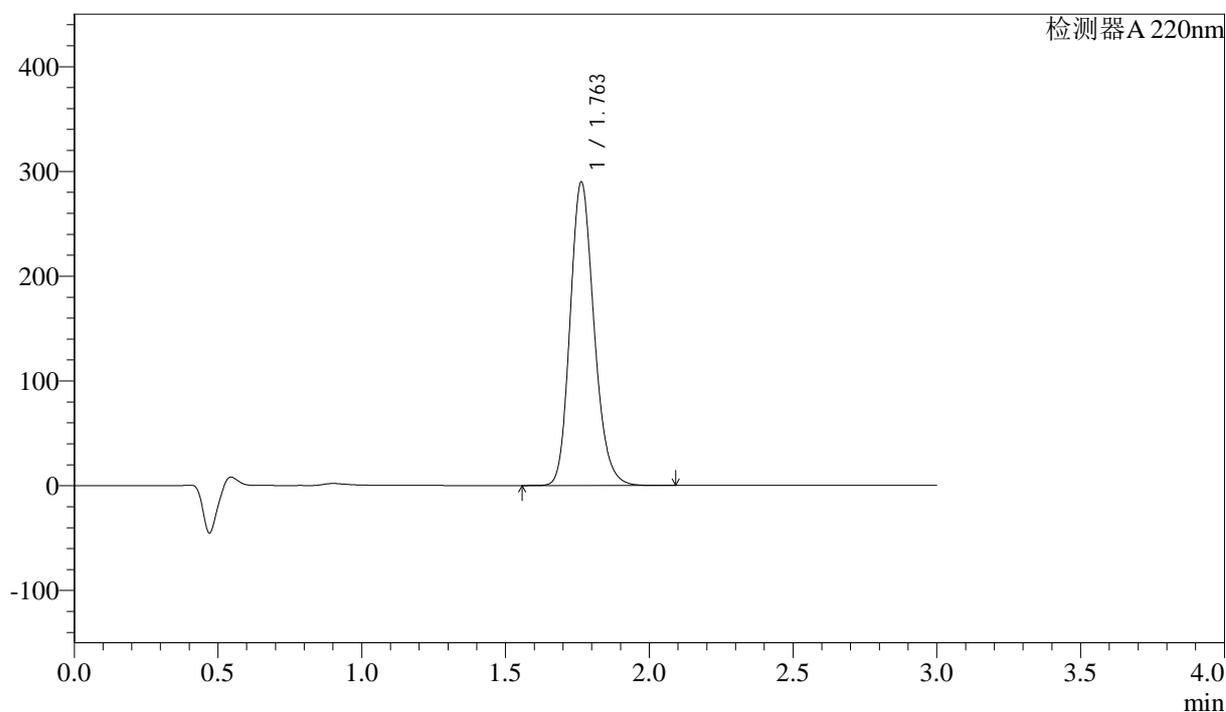

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.763 | 1677212 | 289721 | 100.000 | 2188       | 1.180 | --       |
| 总计 |       | 1677212 | 289721 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-6-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 12:14:26 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:53:03 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

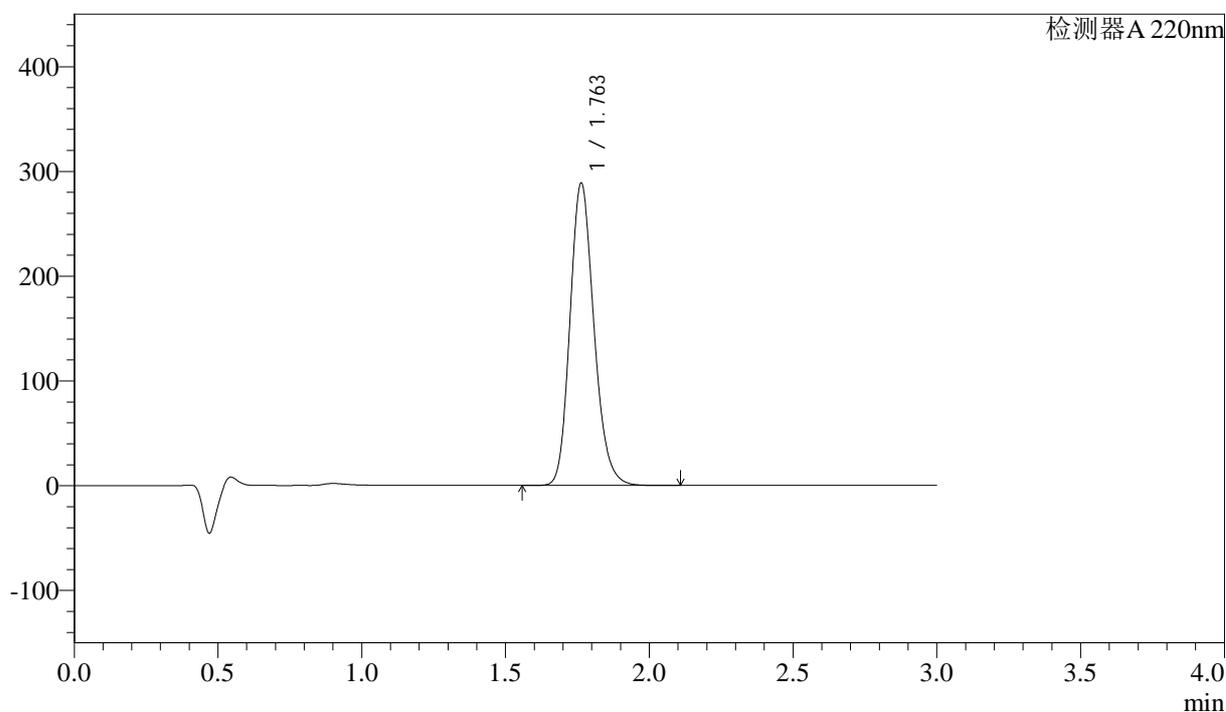

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.763 | 1673939 | 288630 | 100.000 | 2178       | 1.179 | --       |
| 总计 |       | 1673939 | 288630 | 100.000 |            |       |          |


图6 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-5

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-7-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 12:17:49 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:53:05 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

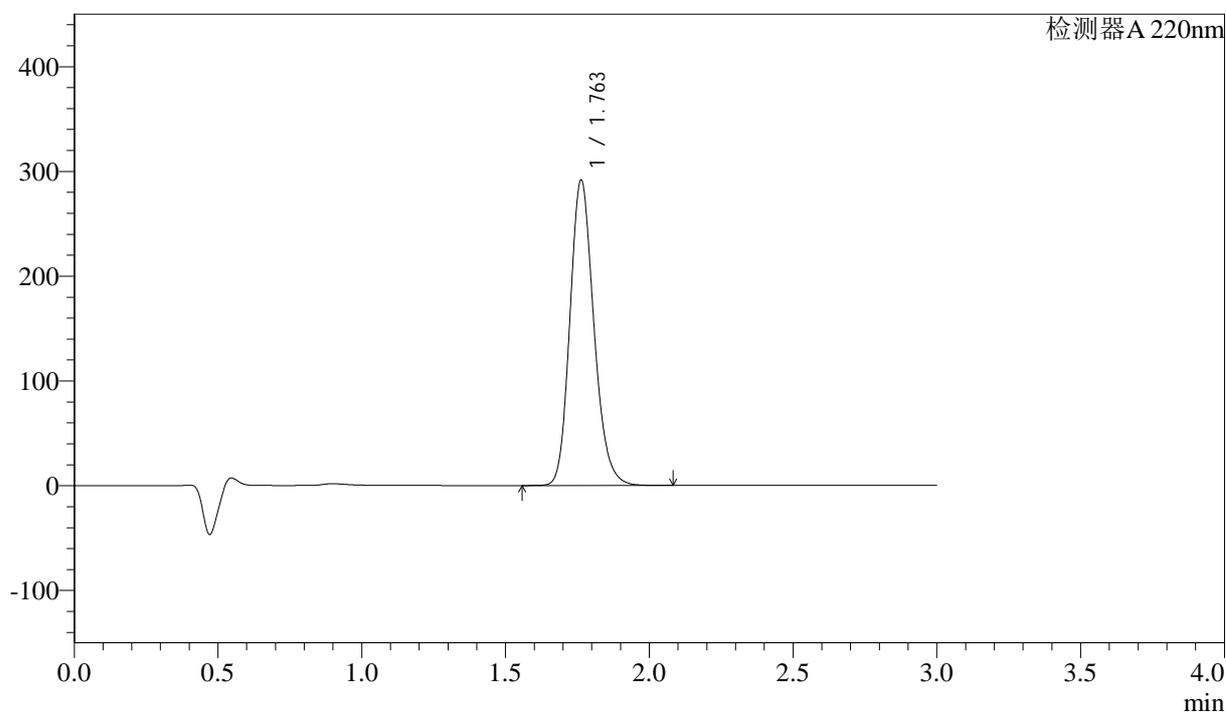

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.763 | 1689161 | 291498 | 100.000 | 2180       | 1.180 | --       |
| 总计 |       | 1689161 | 291498 | 100.000 |            |       |          |


图7 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-8-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 12:21:12 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:53:08 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

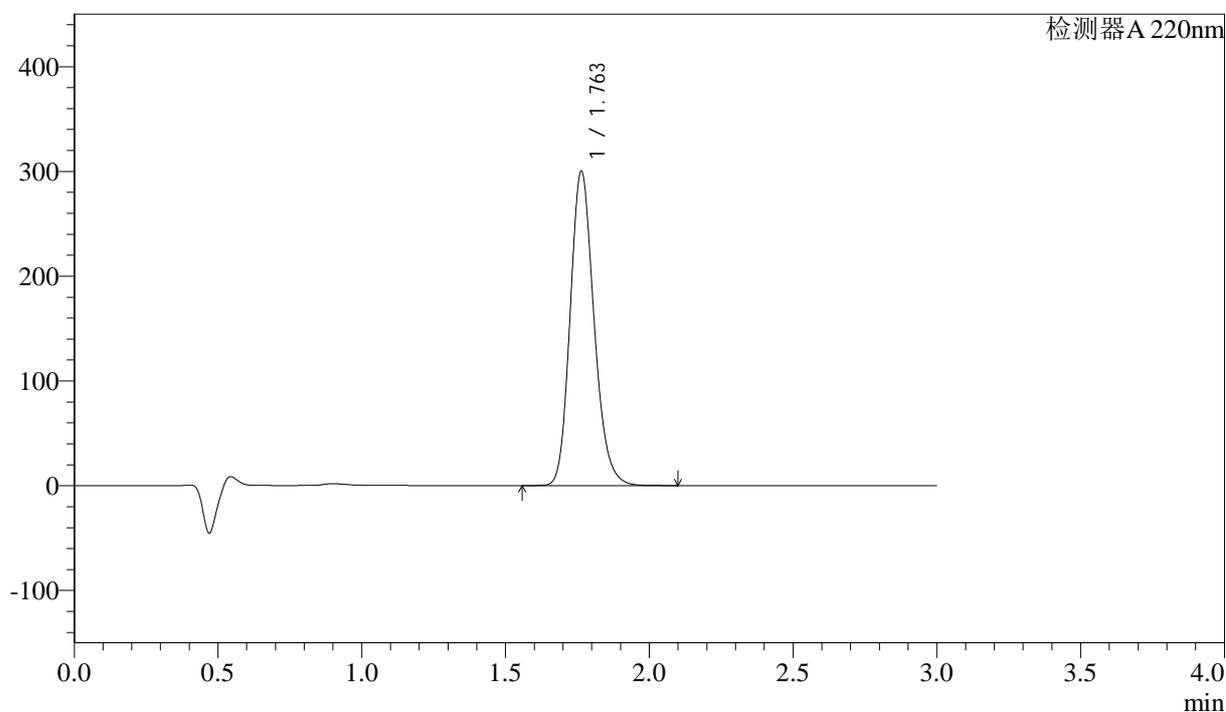

## &lt;峰表&gt;

检测器 A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.763 | 1733778 | 300136 | 100.000 | 2198       | 1.181 | --       |
| 总计 |       | 1733778 | 300136 | 100.000 |            |       |          |


图8 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-9-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 12:24:35 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:53:11 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

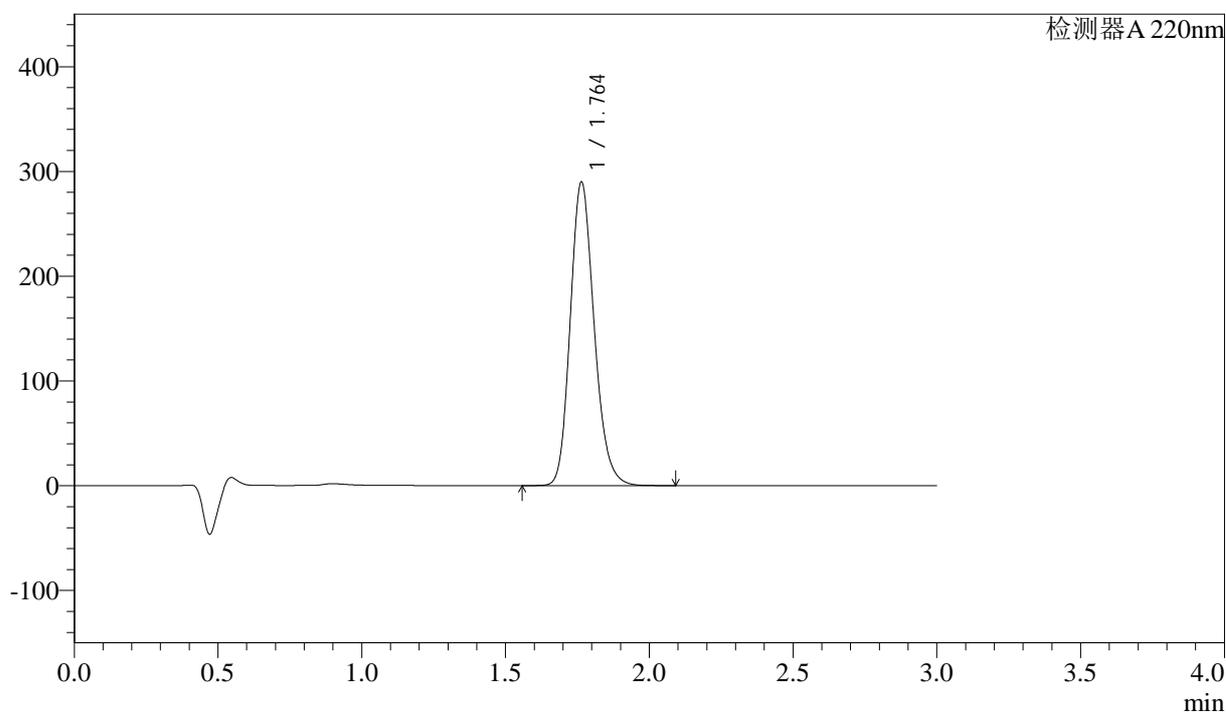

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1674798 | 289862 | 100.000 | 2198       | 1.182 | --       |
| 总计 |       | 1674798 | 289862 | 100.000 |            |       |          |


图9 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-10-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 12:27:58 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:53:13 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

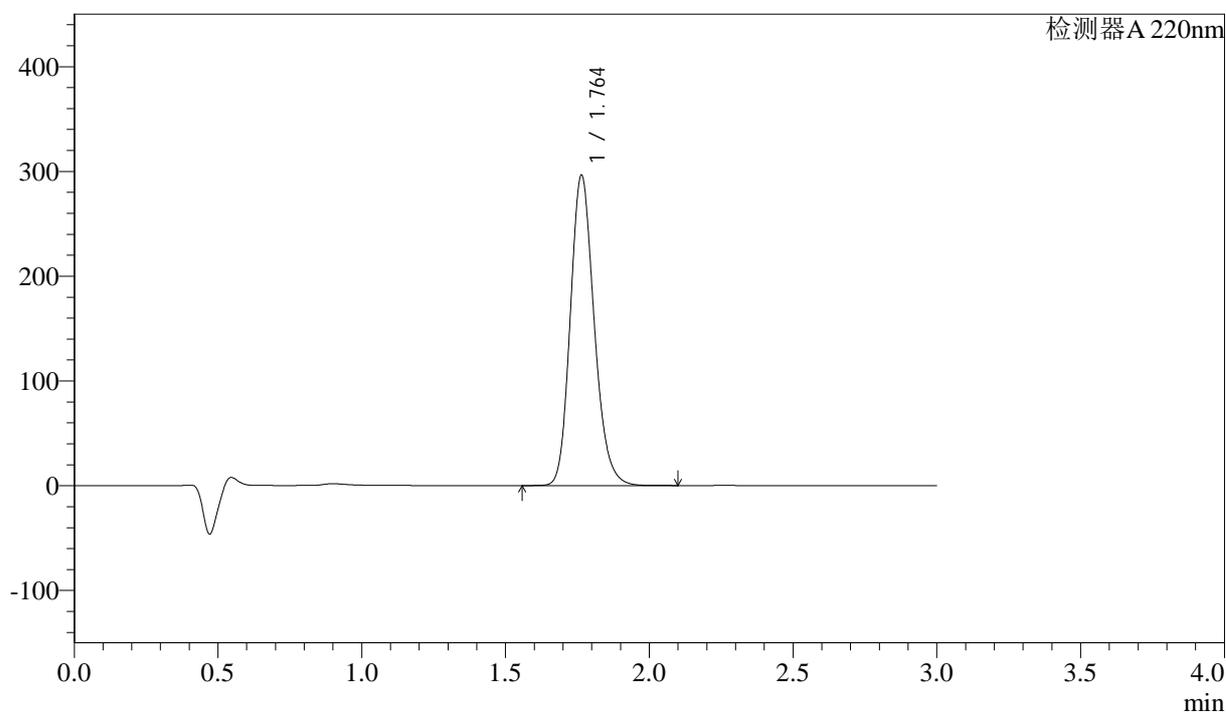

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1710993 | 296243 | 100.000 | 2200       | 1.181 | --       |
| 总计 |       | 1710993 | 296243 | 100.000 |            |       |          |


图10 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-11-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 12:31:20 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:53:16 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

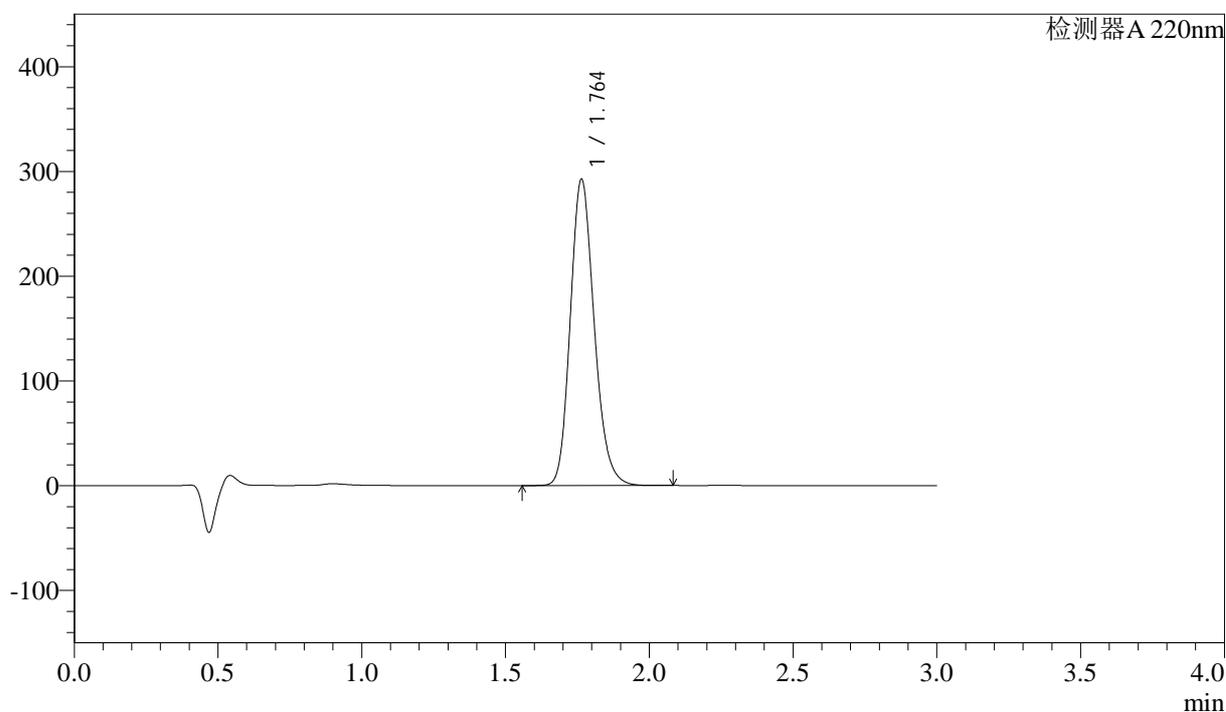

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1690725 | 292474 | 100.000 | 2196       | 1.180 | --       |
| 总计 |       | 1690725 | 292474 | 100.000 |            |       |          |


图11 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-12-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 12:34:42 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:53:18 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

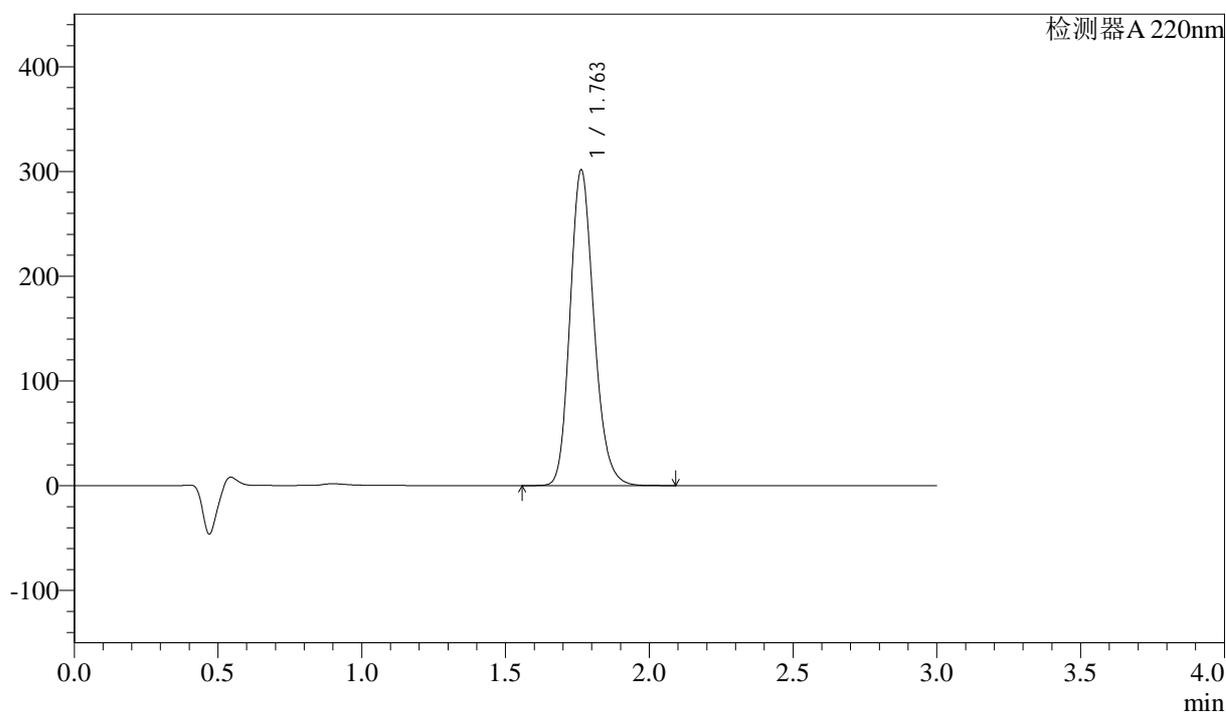

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.763 | 1737020 | 301404 | 100.000 | 2205       | 1.180 | --       |
| 总计 |       | 1737020 | 301404 | 100.000 |            |       |          |


图12 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-13-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 12:38:04 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:53:21 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

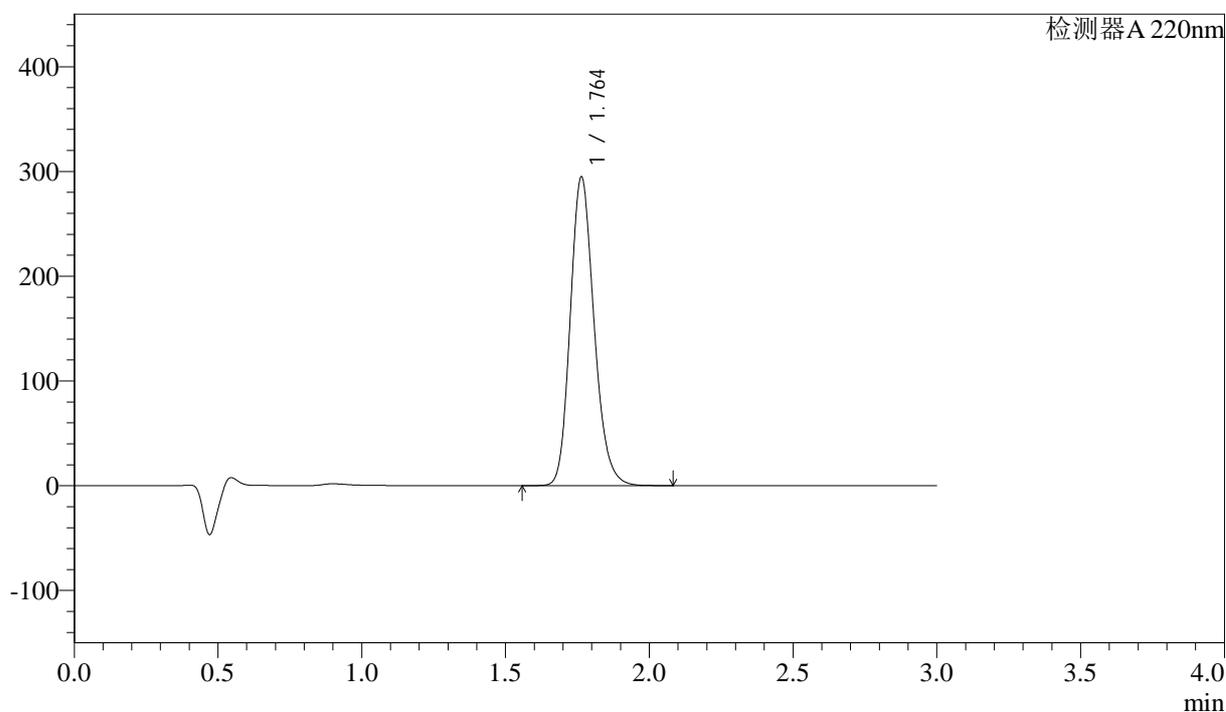

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1696593 | 294719 | 100.000 | 2214       | 1.181 | --       |
| 总计 |       | 1696593 | 294719 | 100.000 |            |       |          |


图13 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-14-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 12:41:27 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:53:23 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

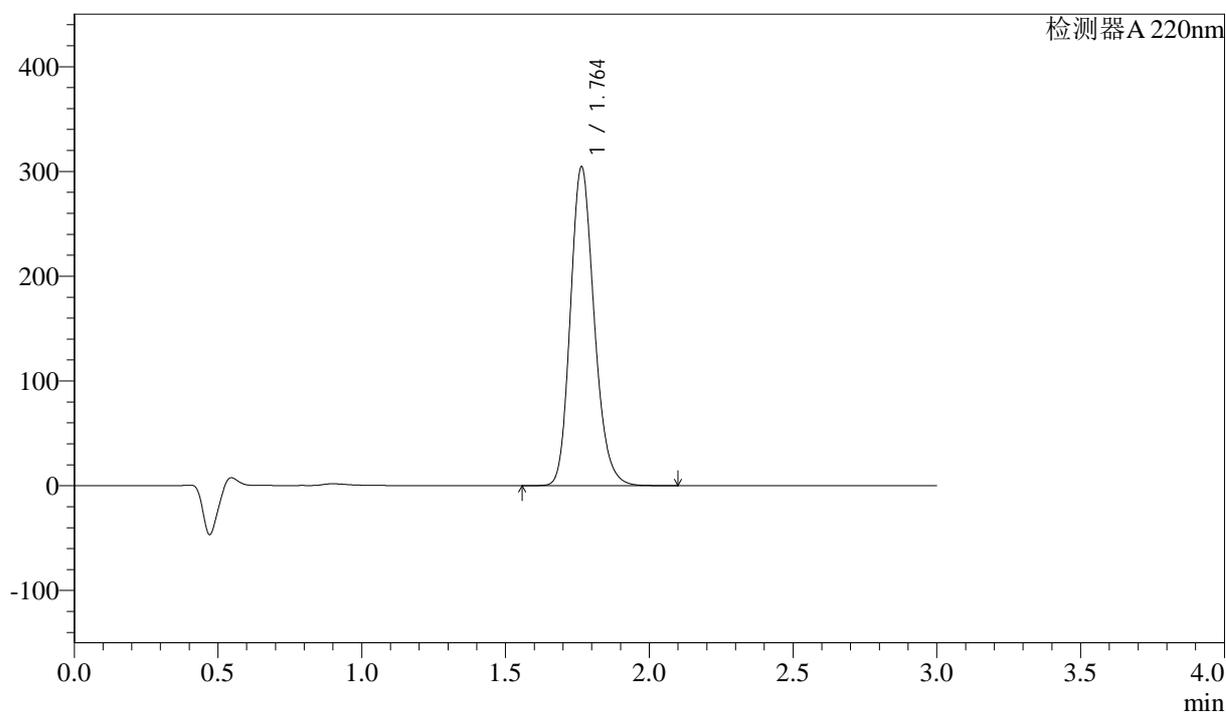

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1752168 | 304413 | 100.000 | 2217       | 1.183 | --       |
| 总计 |       | 1752168 | 304413 | 100.000 |            |       |          |


图14 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-15-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 12:44:49 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:53:26 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

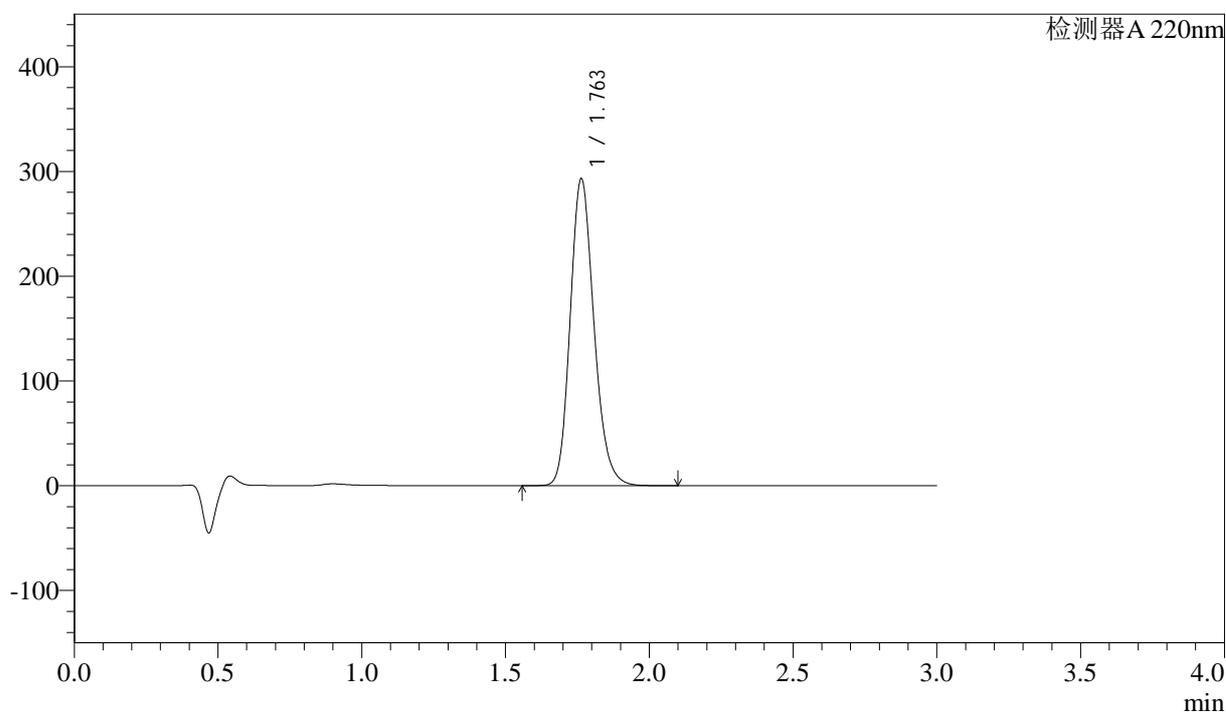

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.763 | 1683940 | 293020 | 100.000 | 2221       | 1.182 | --       |
| 总计 |       | 1683940 | 293020 | 100.000 |            |       |          |


图15 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-16-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 12:48:11 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:53:28 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

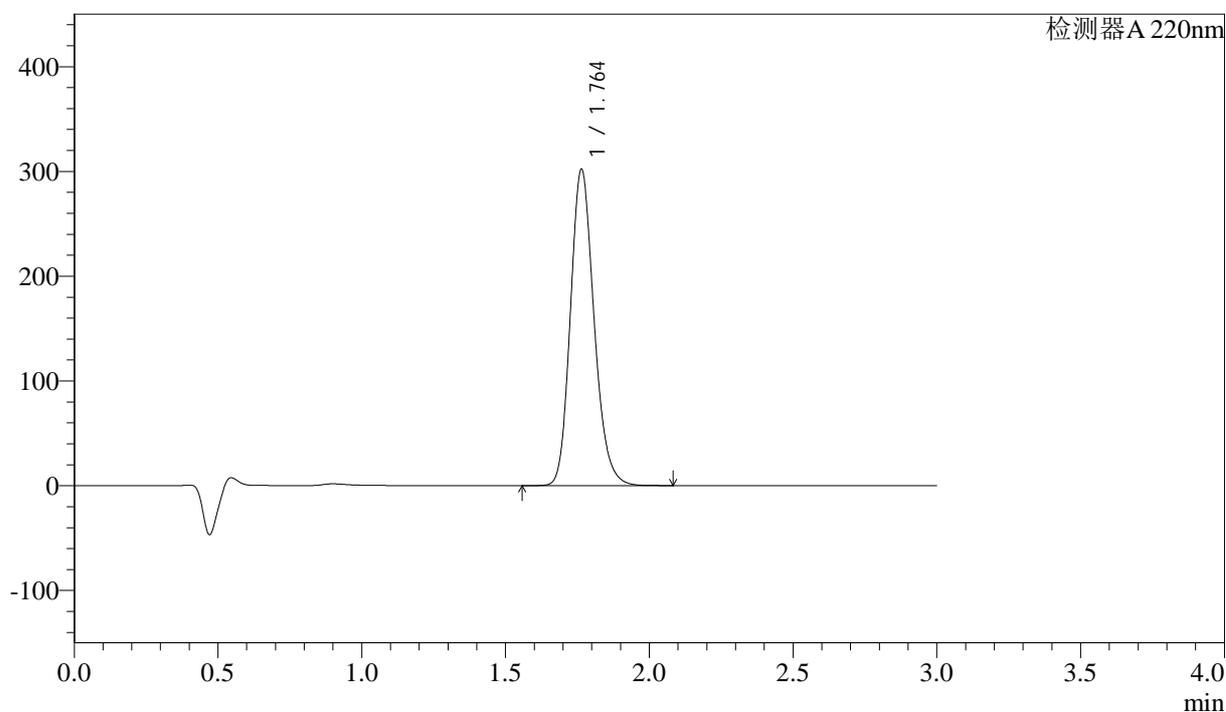

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1726373 | 302033 | 100.000 | 2247       | 1.181 | --       |
| 总计 |       | 1726373 | 302033 | 100.000 |            |       |          |


图16 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-17-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 12:51:34 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:53:31 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

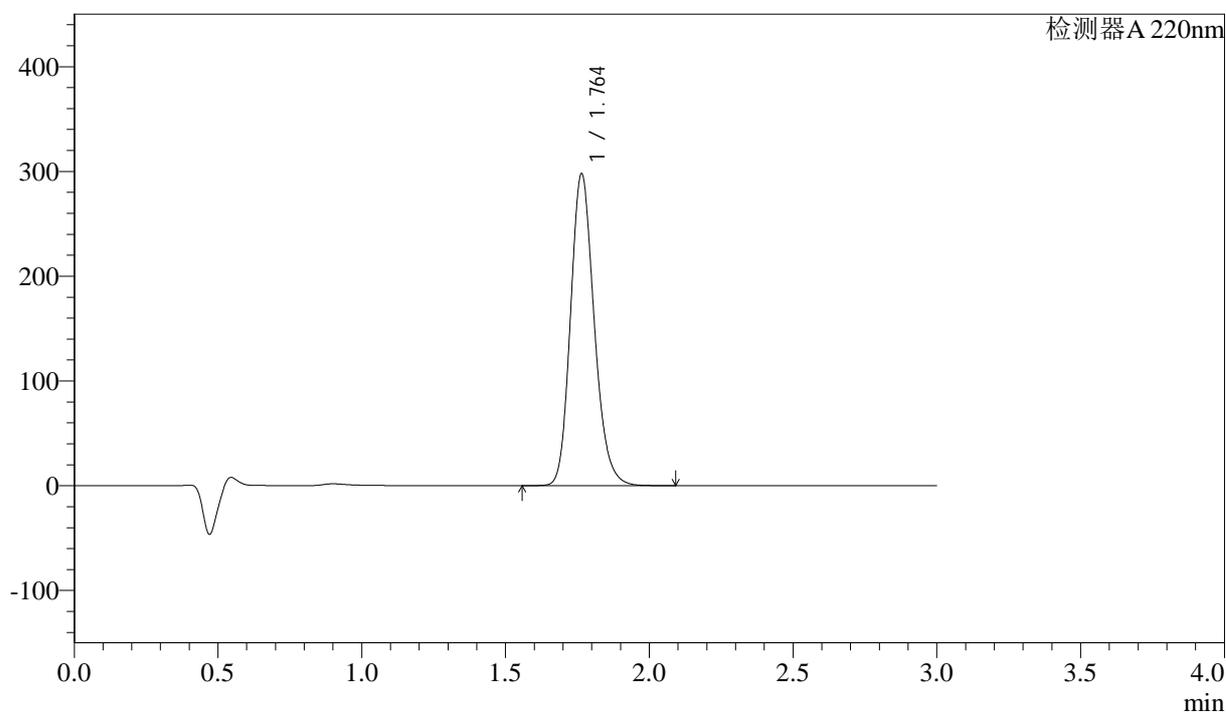

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1704541 | 297727 | 100.000 | 2242       | 1.182 | --       |
| 总计 |       | 1704541 | 297727 | 100.000 |            |       |          |


图17 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-18-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 12:54:56 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/01 08:53:33 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

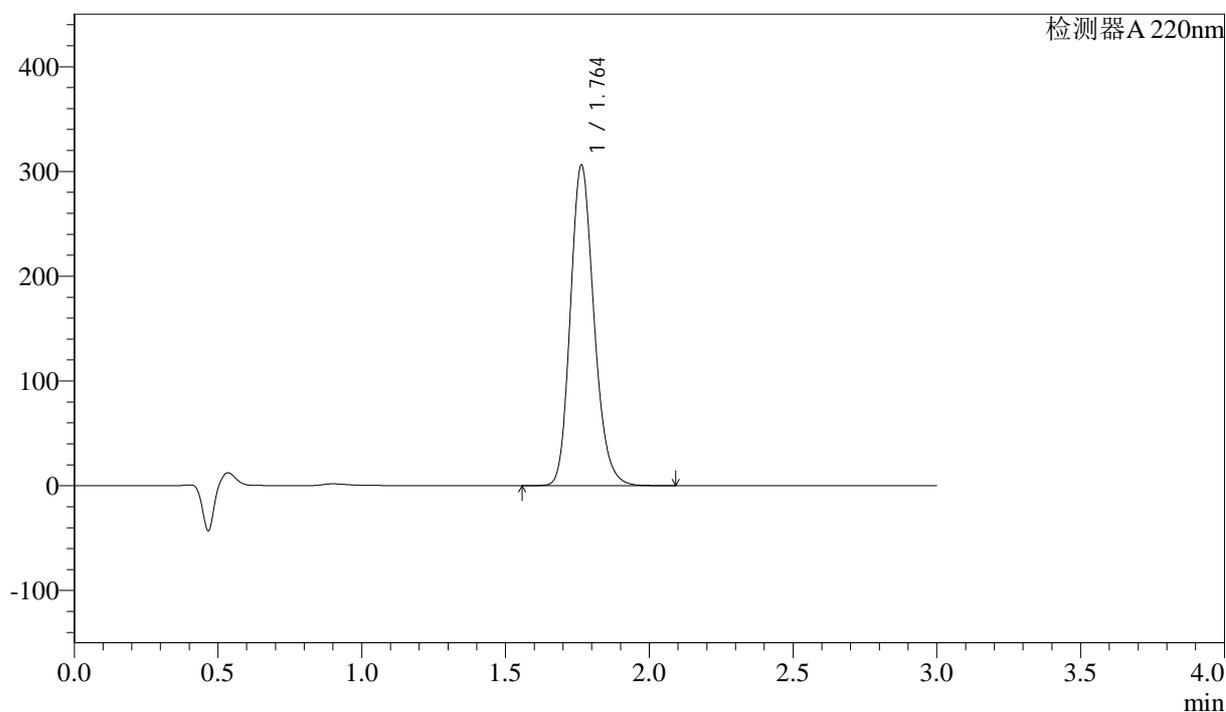

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1747833 | 306020 | 100.000 | 2251       | 1.183 | --       |
| 总计 |       | 1747833 | 306020 | 100.000 |            |       |          |


图18 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-19-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 12:58:19 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:53:36 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

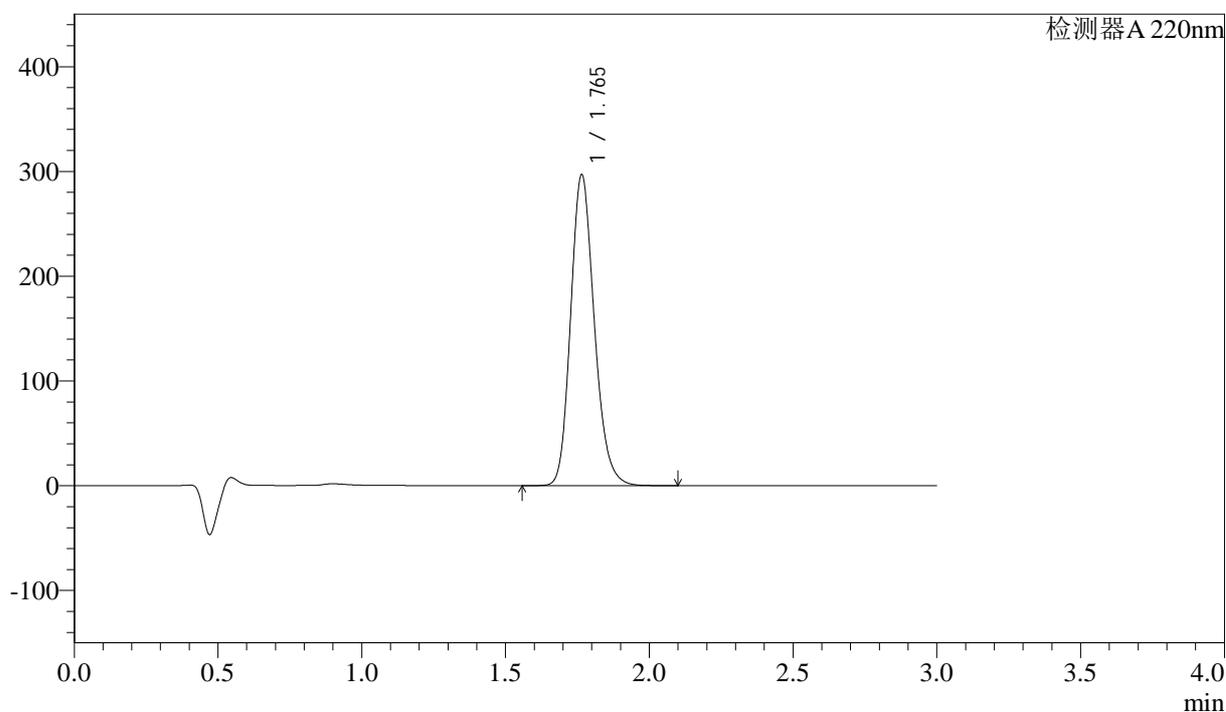

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1696551 | 296681 | 100.000 | 2250       | 1.182 | --       |
| 总计 |       | 1696551 | 296681 | 100.000 |            |       |          |


图19 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-20-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 13:01:41 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:53:38 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

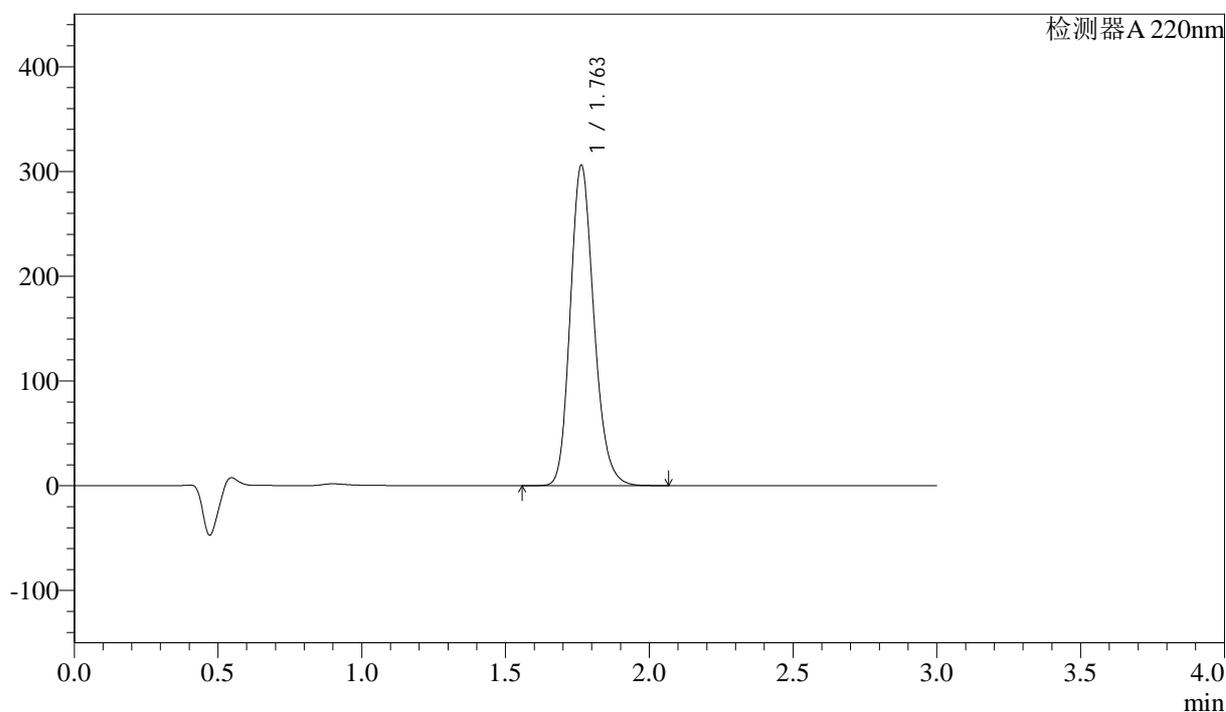

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.763 | 1748297 | 305920 | 100.000 | 2246       | 1.183 | --       |
| 总计 |       | 1748297 | 305920 | 100.000 |            |       |          |


图20 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-21-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 13:05:04 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:53:41 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

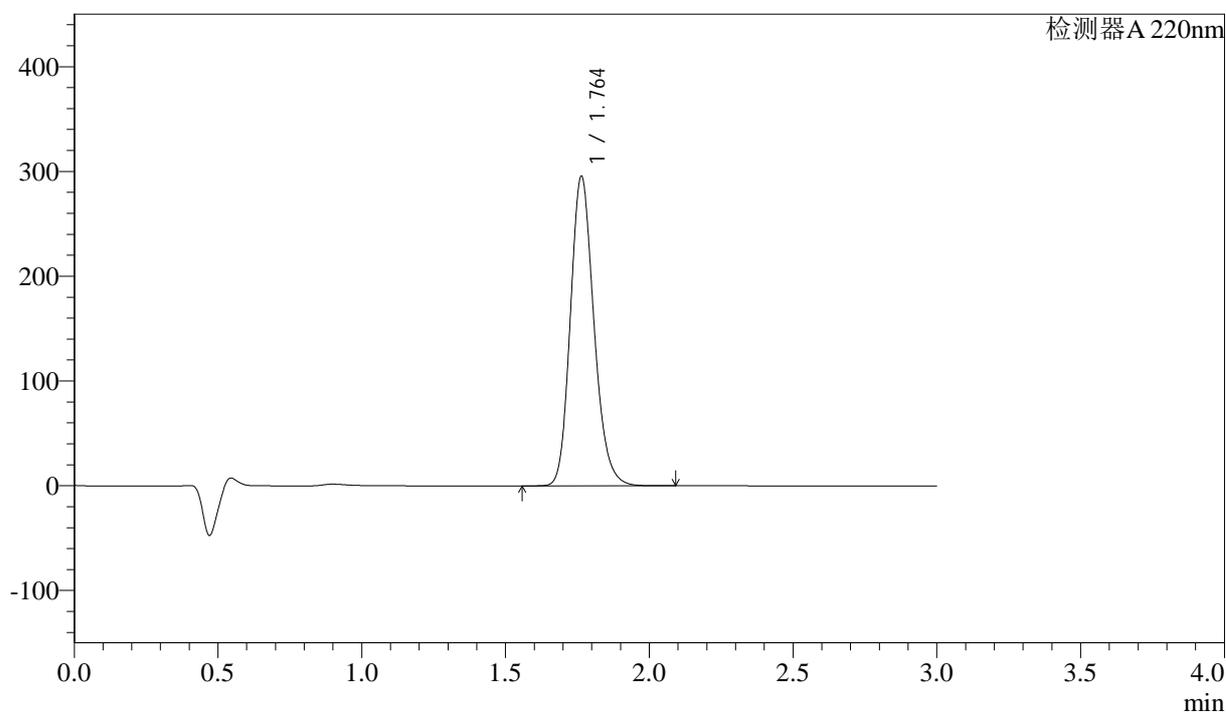

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1685868 | 295565 | 100.000 | 2257       | 1.182 | --       |
| 总计 |       | 1685868 | 295565 | 100.000 |            |       |          |


图21 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-22-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 13:08:26      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/01 08:53:44 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV

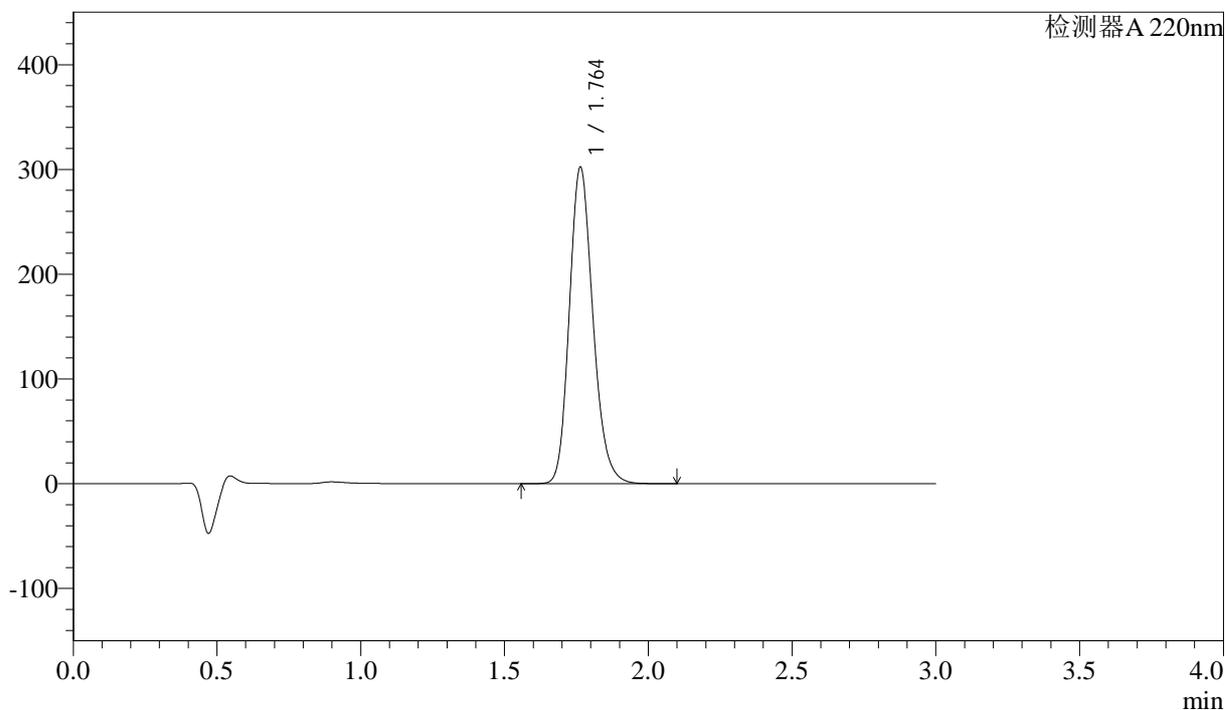

<峰表>

检测器 A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1724579 | 302162 | 100.000 | 2254       | 1.183 | --       |
| 总计 |       | 1724579 | 302162 | 100.000 |            |       |          |


图22 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-23-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 13:11:49 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:53:46 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

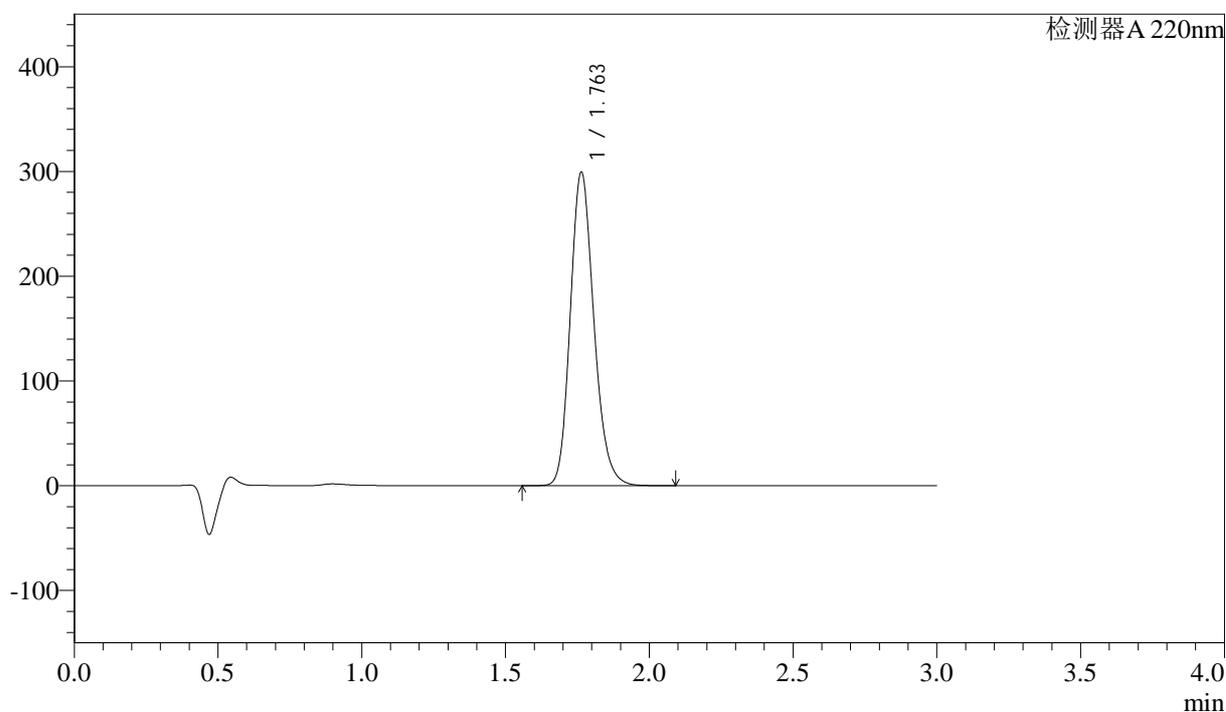

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.763 | 1707064 | 299344 | 100.000 | 2257       | 1.183 | --       |
| 总计 |       | 1707064 | 299344 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-24-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 13:15:12 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:53:49 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

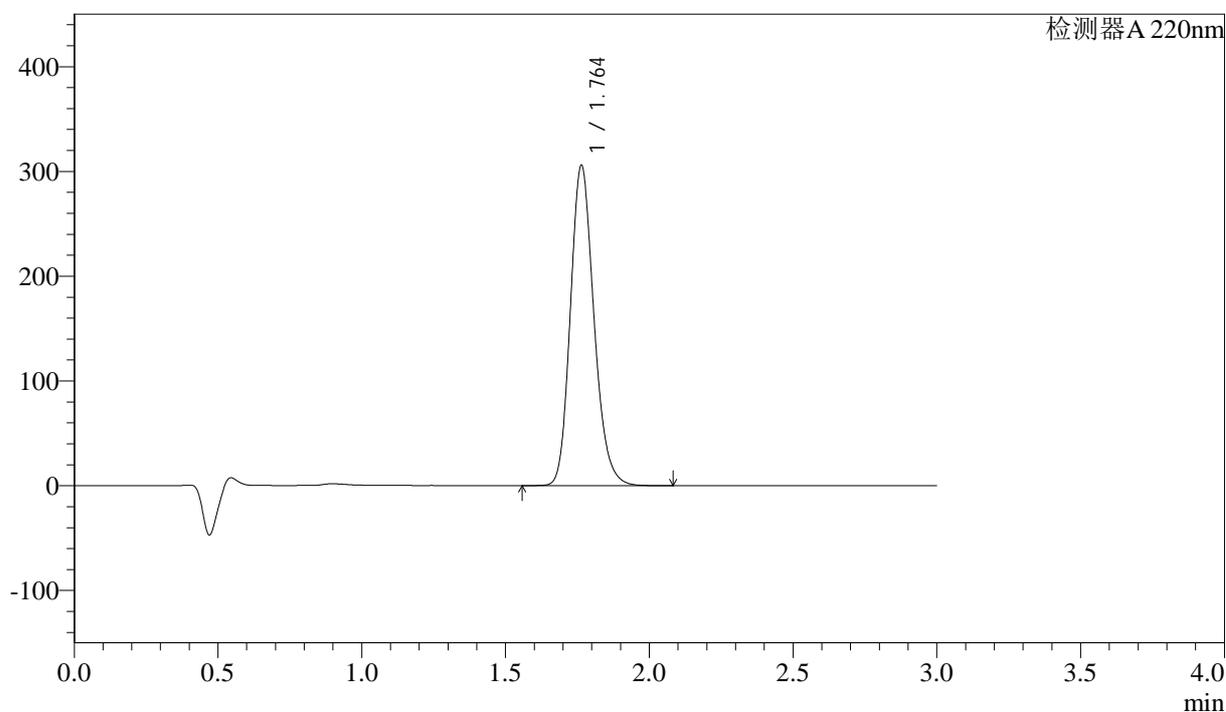

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1742611 | 305728 | 100.000 | 2259       | 1.183 | --       |
| 总计 |       | 1742611 | 305728 | 100.000 |            |       |          |


图24 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-25-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 13:18:35 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:53:51 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

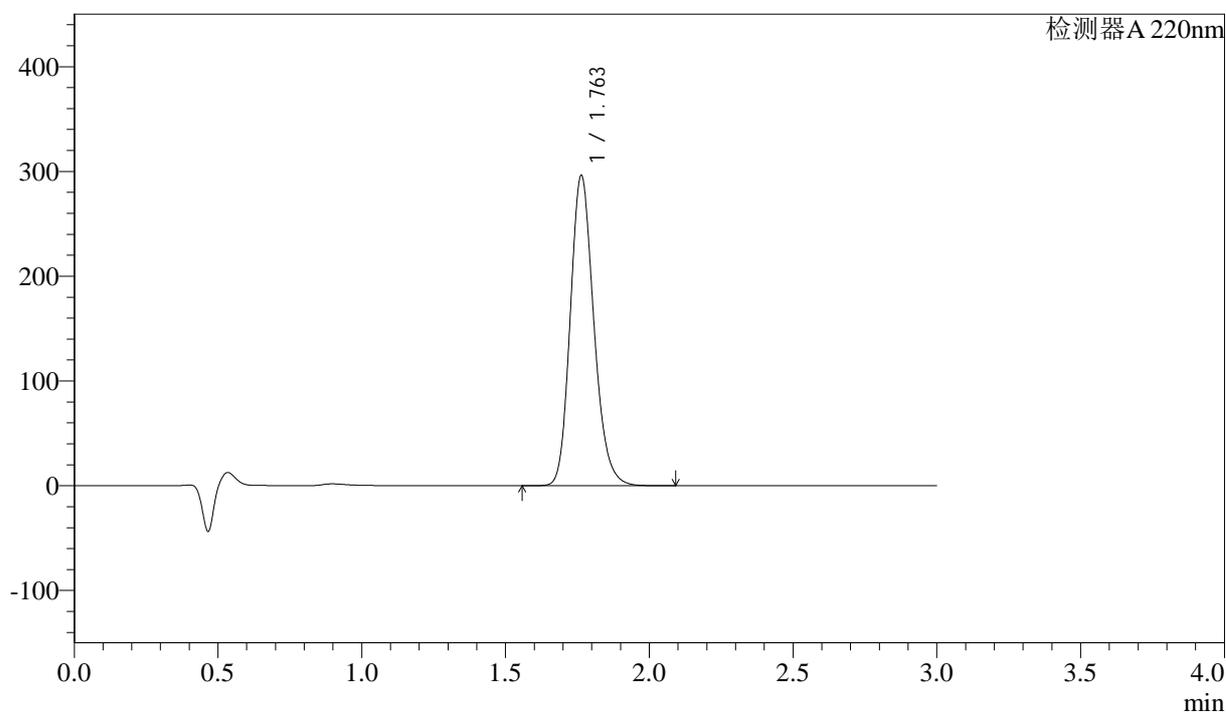

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.763 | 1690491 | 296178 | 100.000 | 2252       | 1.183 | --       |
| 总计 |       | 1690491 | 296178 | 100.000 |            |       |          |


图25 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-26-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 13:21:58 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:53:55 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

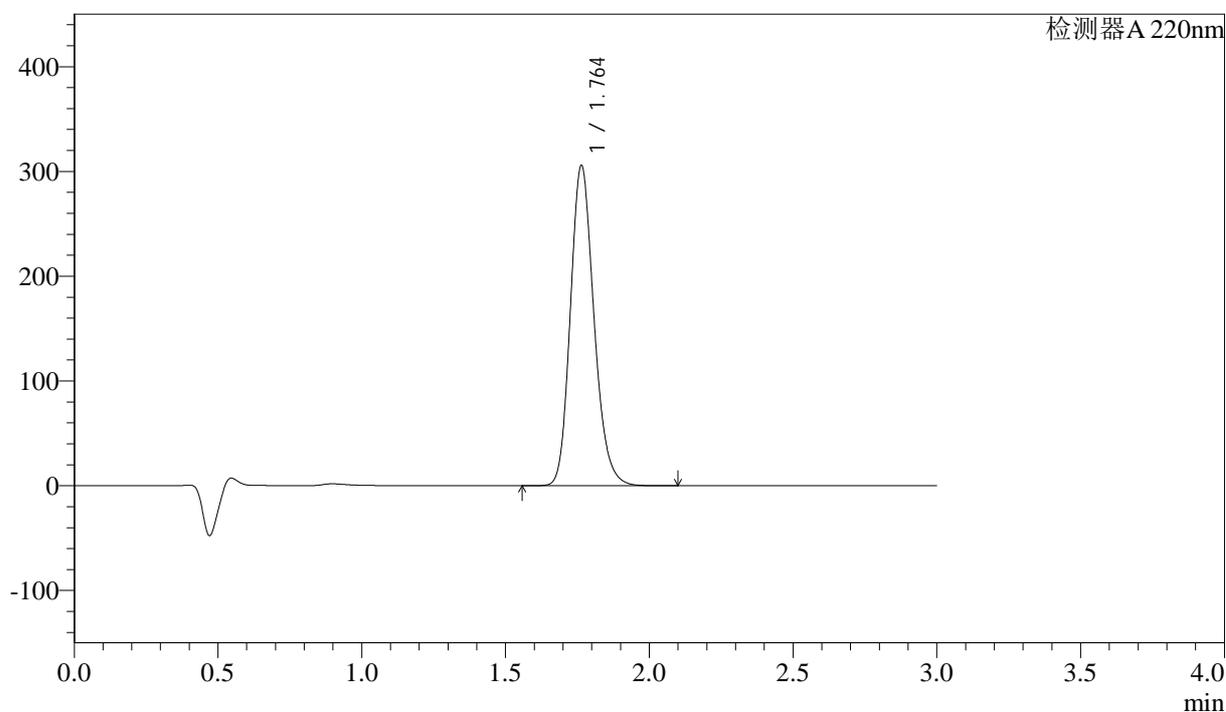

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1745444 | 305732 | 100.000 | 2252       | 1.183 | --       |
| 总计 |       | 1745444 | 305732 | 100.000 |            |       |          |


图26 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-27-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 13:25:21 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:53:57 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

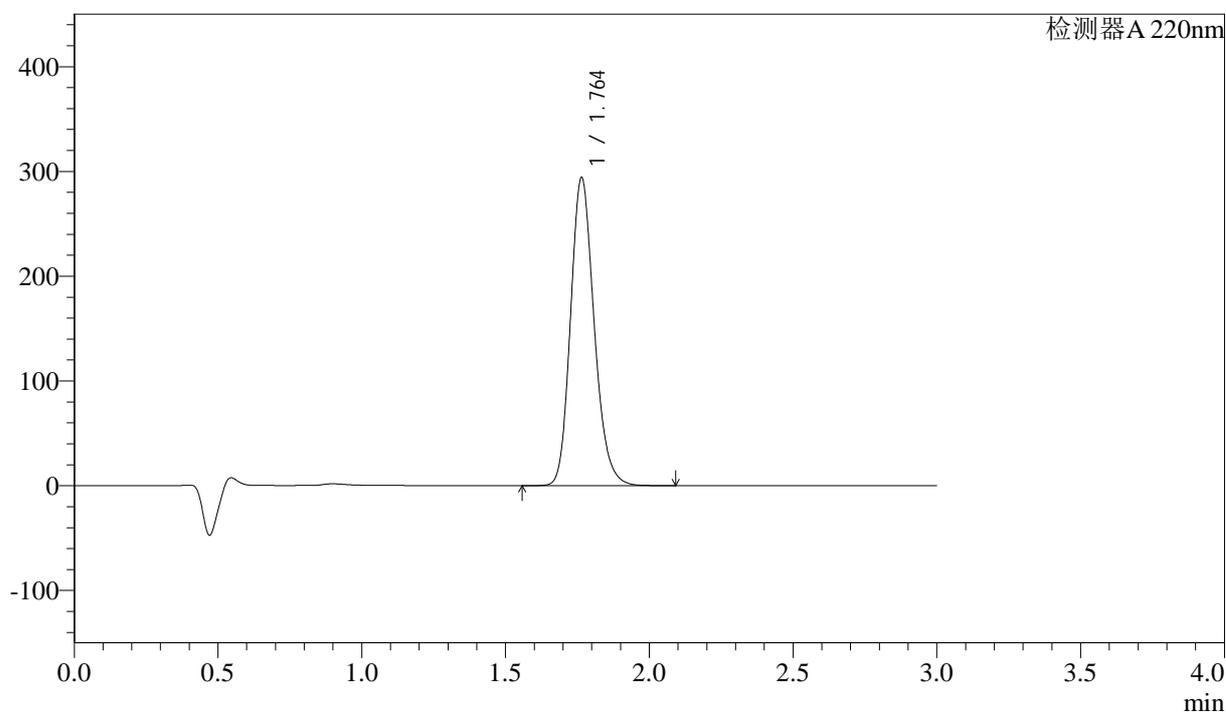

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1679756 | 293943 | 100.000 | 2251       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 1679756 | 293943 | 100.000 |            |       |          |


图27 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-28-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 13:28:43 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:54:00 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

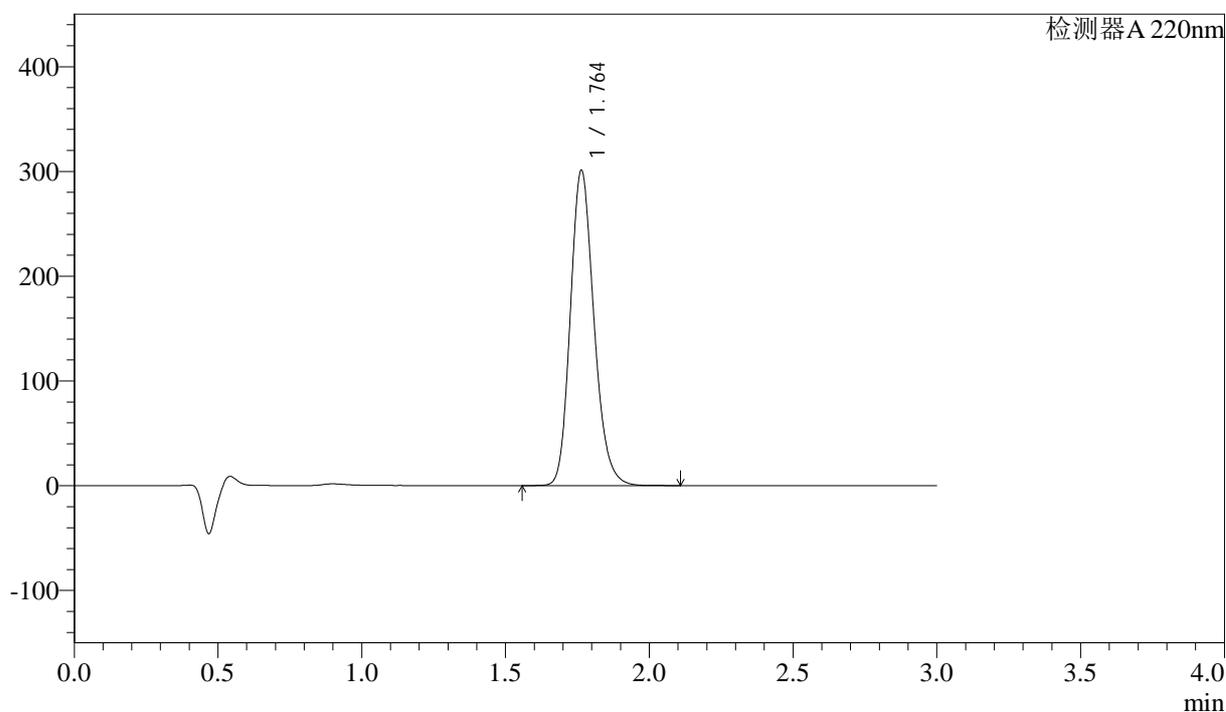

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1719244 | 300997 | 100.000 | 2251       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 1719244 | 300997 | 100.000 |            |       |          |


图28 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-29-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-40  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 13:32:06 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:54:03 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

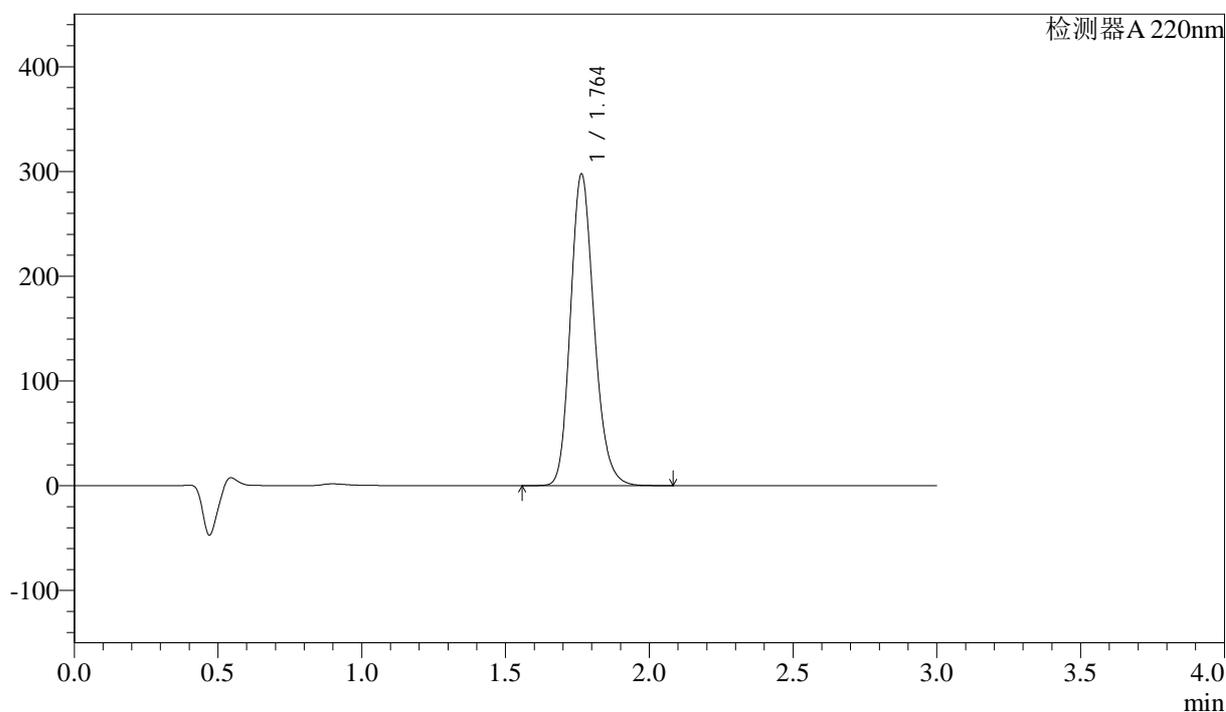

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1700205 | 297467 | 100.000 | 2248       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 1700205 | 297467 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-30-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-49  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 13:35:29 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:54:05 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

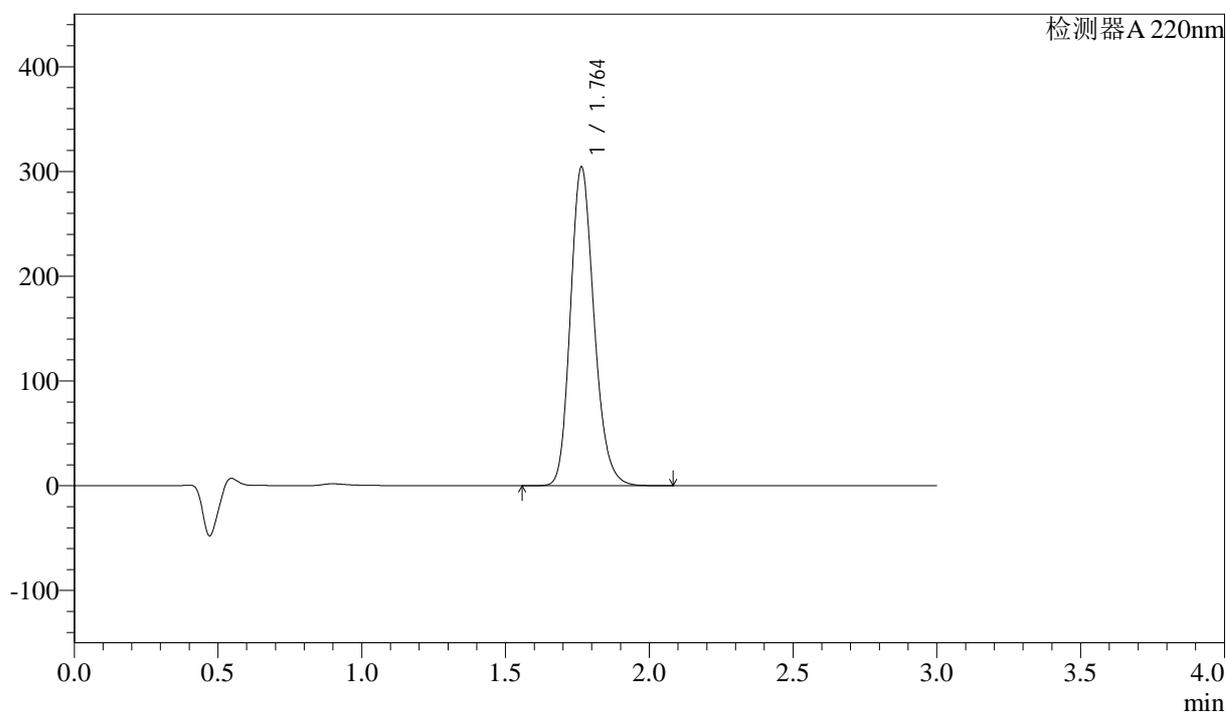

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1738348 | 304274 | 100.000 | 2250       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1738348 | 304274 | 100.000 |            |       |          |


图30 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-31-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 13:38:52 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:54:08 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

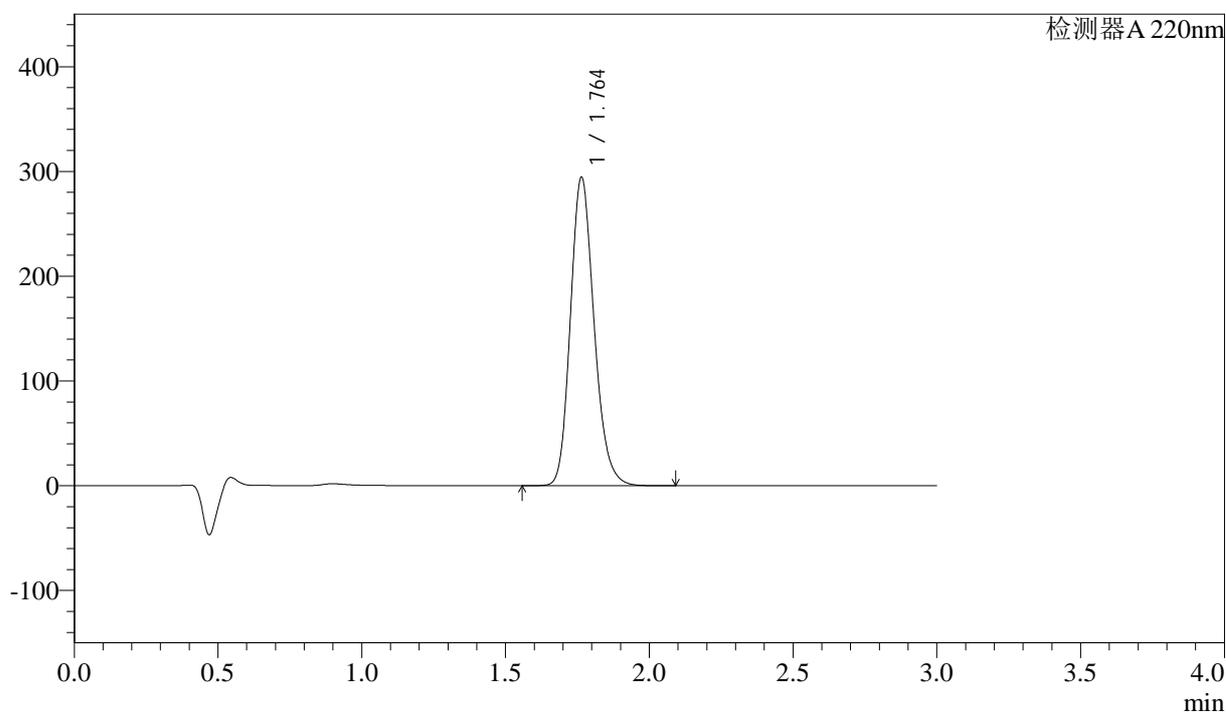

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1684741 | 294484 | 100.000 | 2244       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1684741 | 294484 | 100.000 |            |       |          |


图31 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-32-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-14  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 13:42:15 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:54:10 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

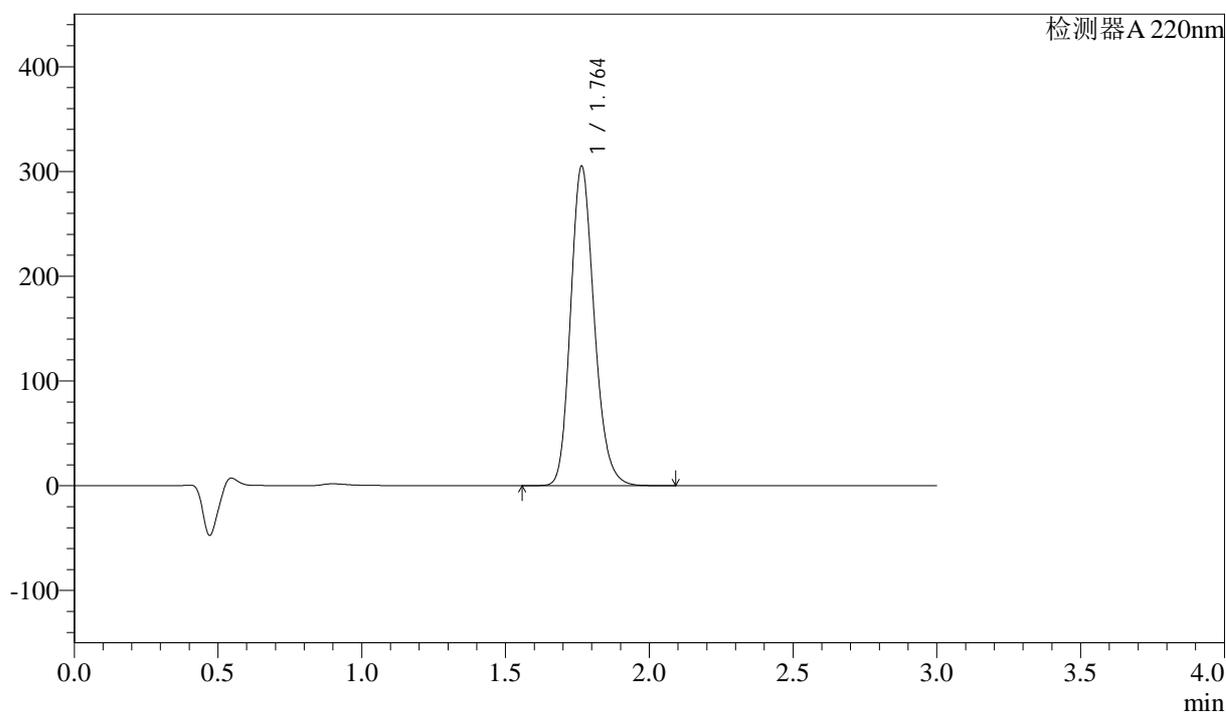

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1741724 | 304860 | 100.000 | 2255       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1741724 | 304860 | 100.000 |            |       |          |


图32 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-33-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-23  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 13:45:37 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:54:13 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

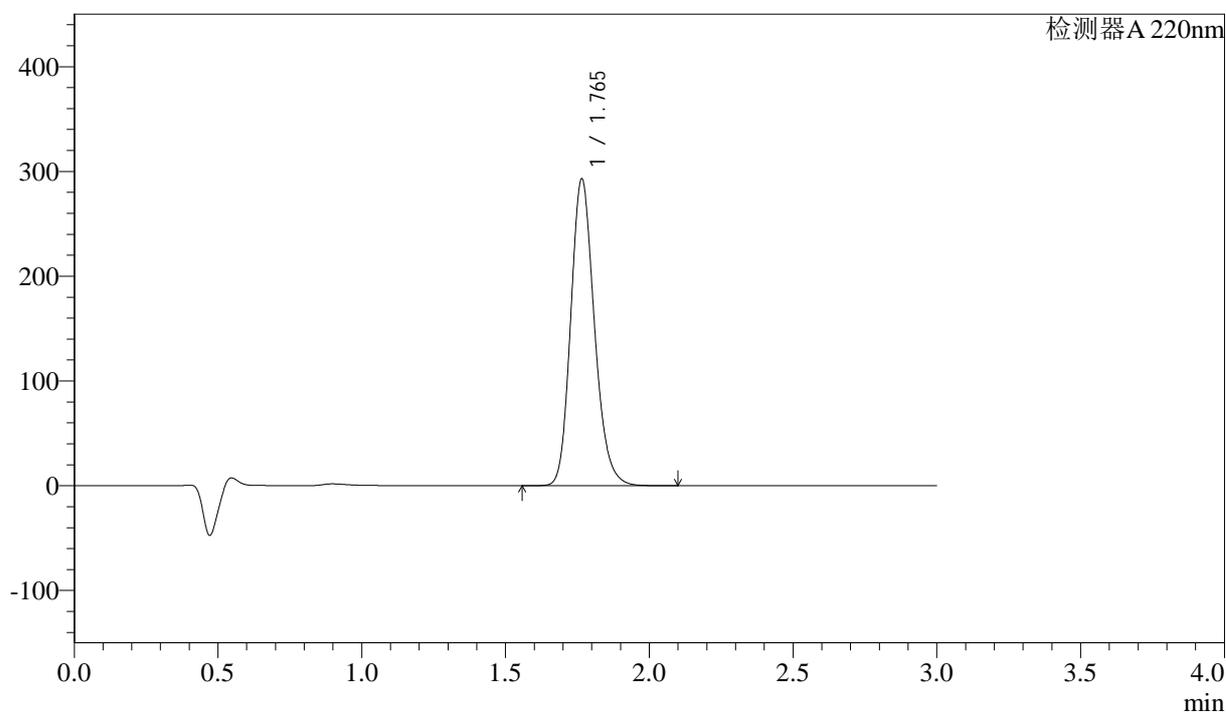

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1675499 | 292629 | 100.000 | 2247       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1675499 | 292629 | 100.000 |            |       |          |


图33 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-34-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-32  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 13:49:00 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:54:15 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

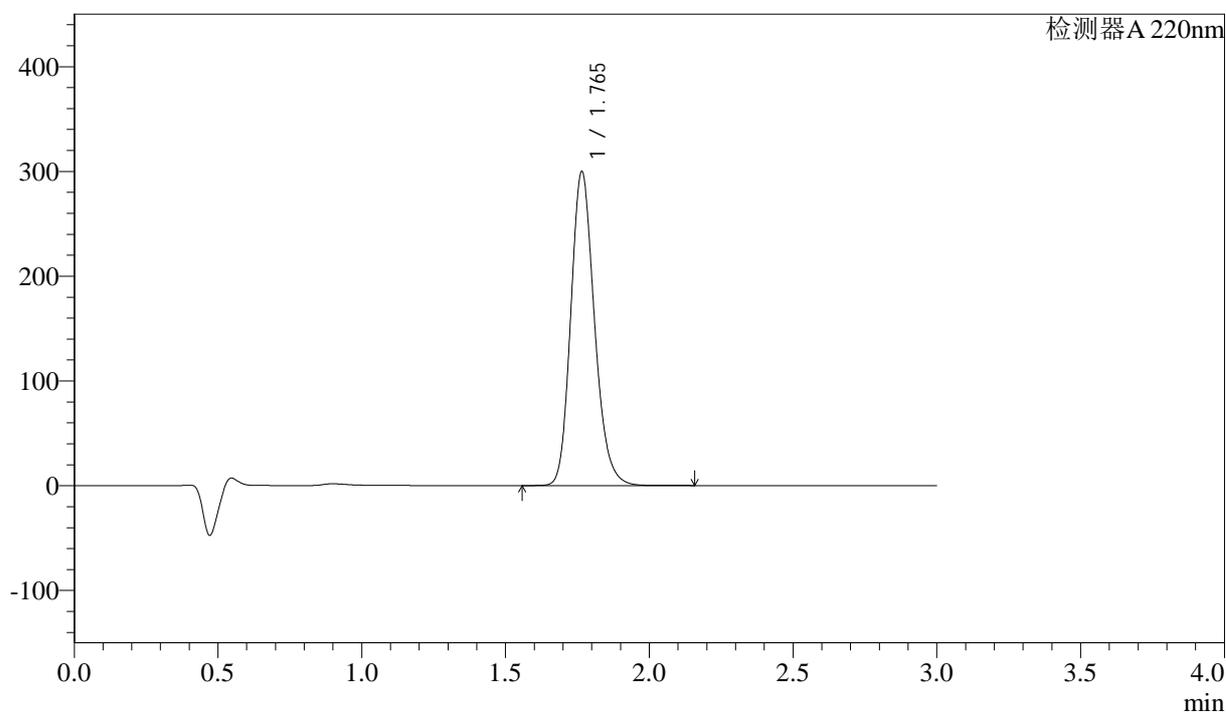

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1716141 | 299350 | 100.000 | 2246       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1716141 | 299350 | 100.000 |            |       |          |


图34 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-35-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-41  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 13:52:22 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:54:18 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

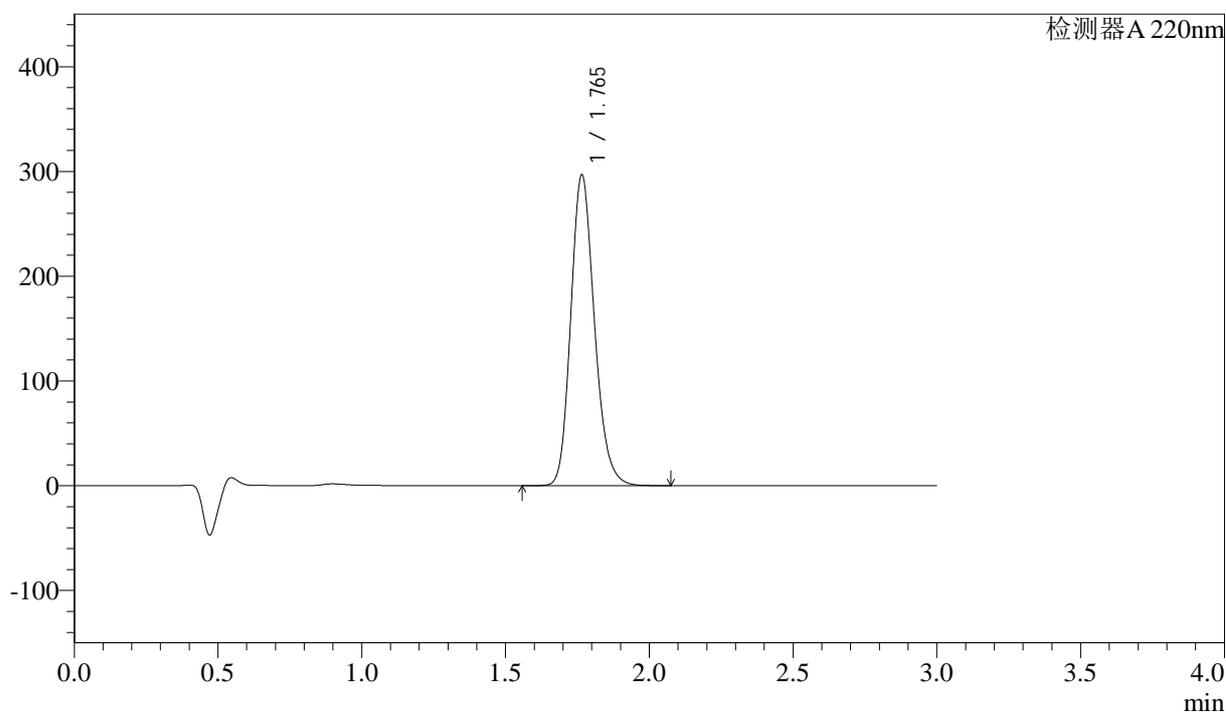

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1695931 | 296360 | 100.000 | 2251       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1695931 | 296360 | 100.000 |            |       |          |


图35 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-36-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-50  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 13:55:44 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:54:20 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

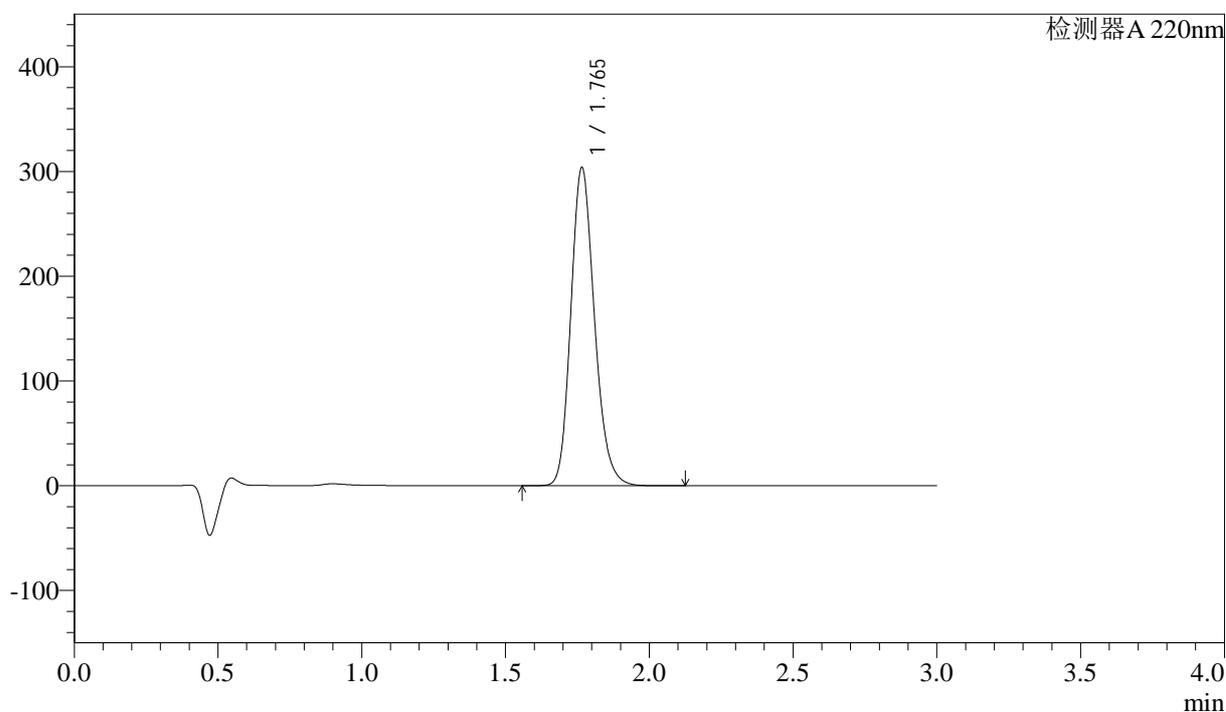

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1735977 | 303310 | 100.000 | 2251       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1735977 | 303310 | 100.000 |            |       |          |


图36 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-37-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 13:59:08 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/01 08:54:23 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

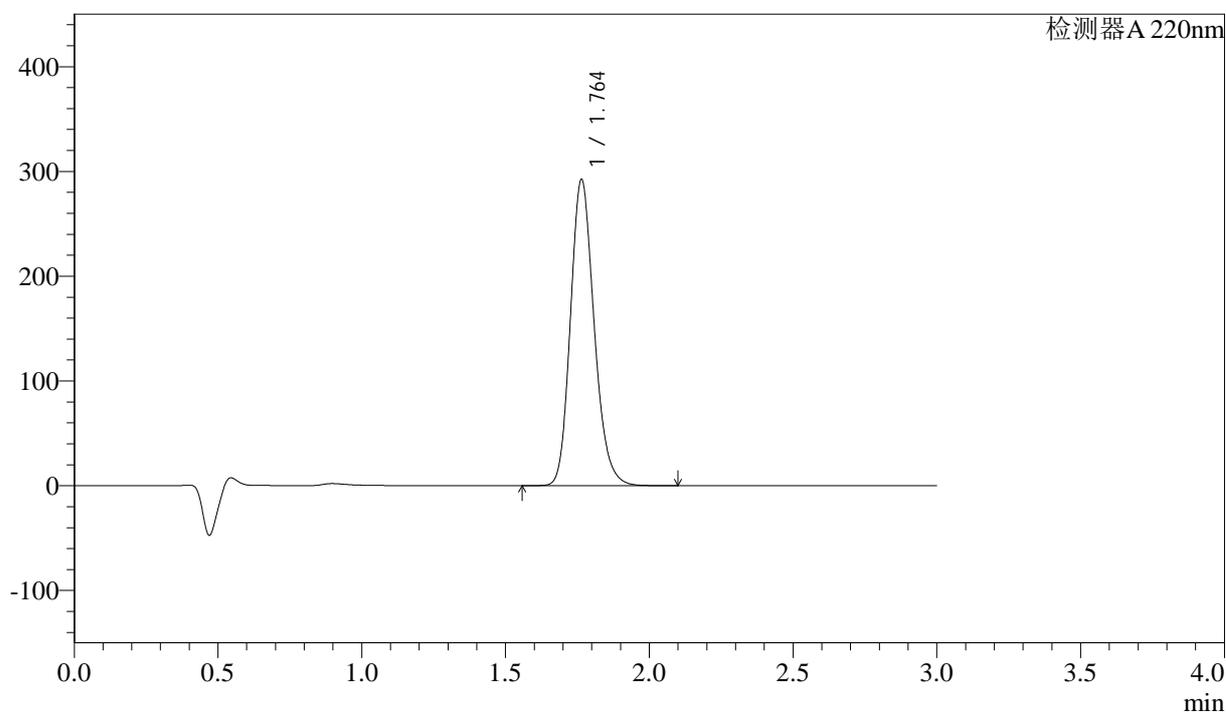

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1674833 | 292305 | 100.000 | 2237       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 1674833 | 292305 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-38-2 - zzp-24061802p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 14:02:31 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:54:26 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

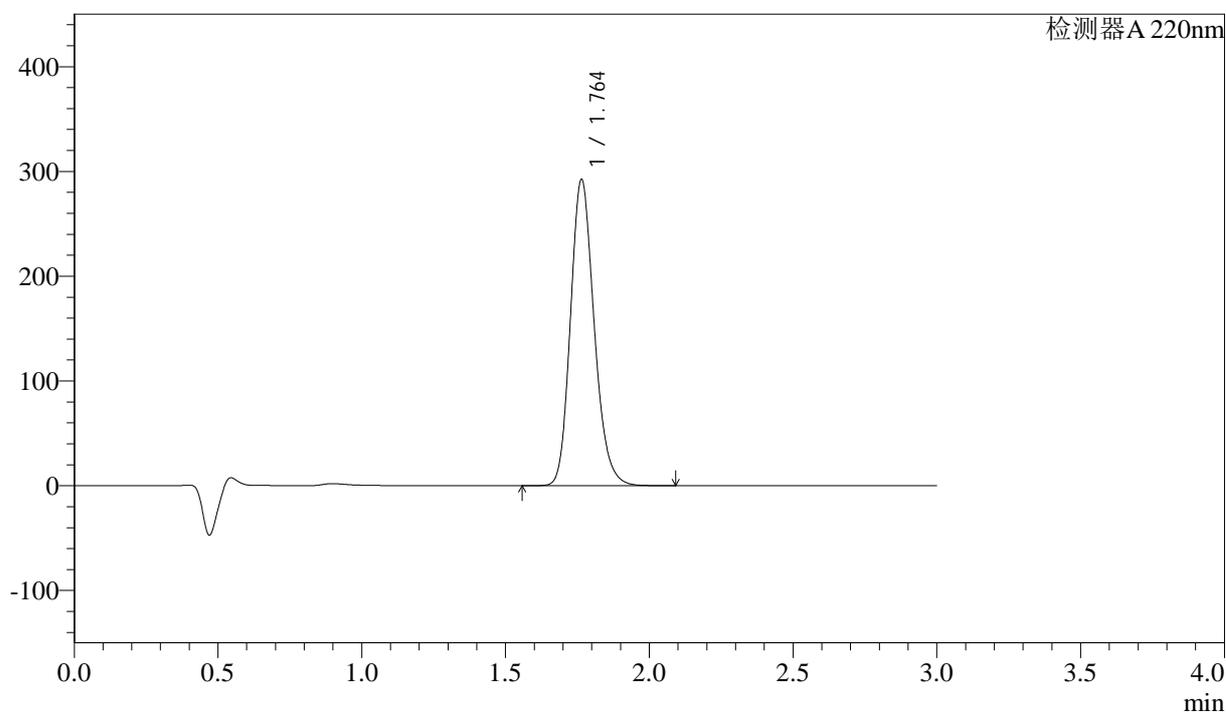

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1675623 | 292312 | 100.000 | 2235       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1675623 | 292312 | 100.000 |            |       |          |


图38 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061802批(60mg规格)-水介质-浆法-50转  
 对照品溶液-2-2

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-39-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-9  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 14:05:55 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:54:28 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

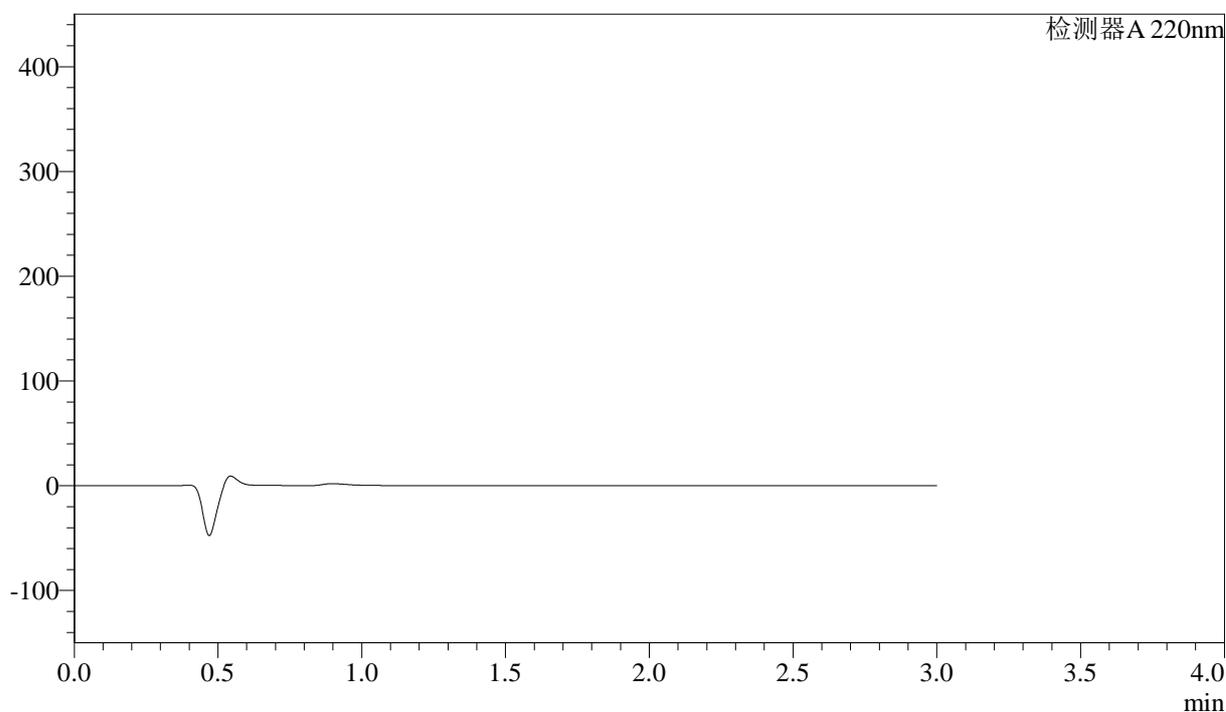

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 高度 | 面积% | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|----|-----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |    |     |            |      |          |


图39 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-浆法-50转  
溶剂

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-40-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 14:09:19 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:54:31 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

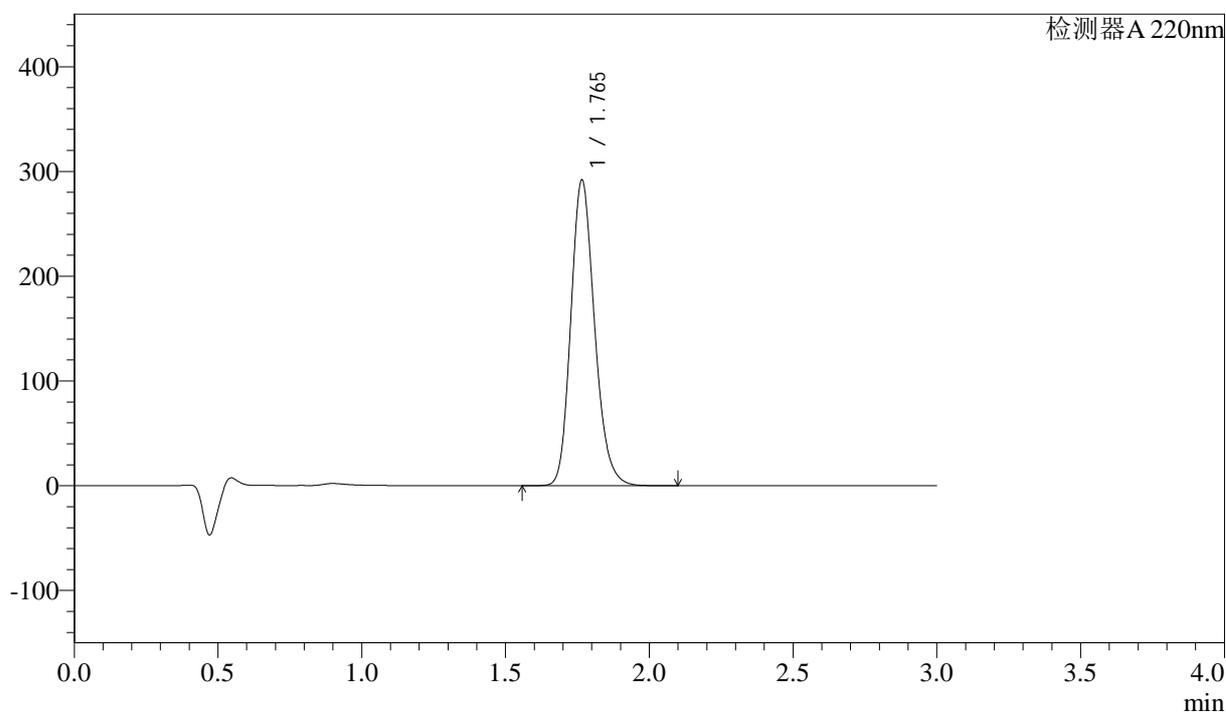

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1675498 | 291368 | 100.000 | 2230       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1675498 | 291368 | 100.000 |            |       |          |


图40 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-41-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 14:12:44 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:54:33 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

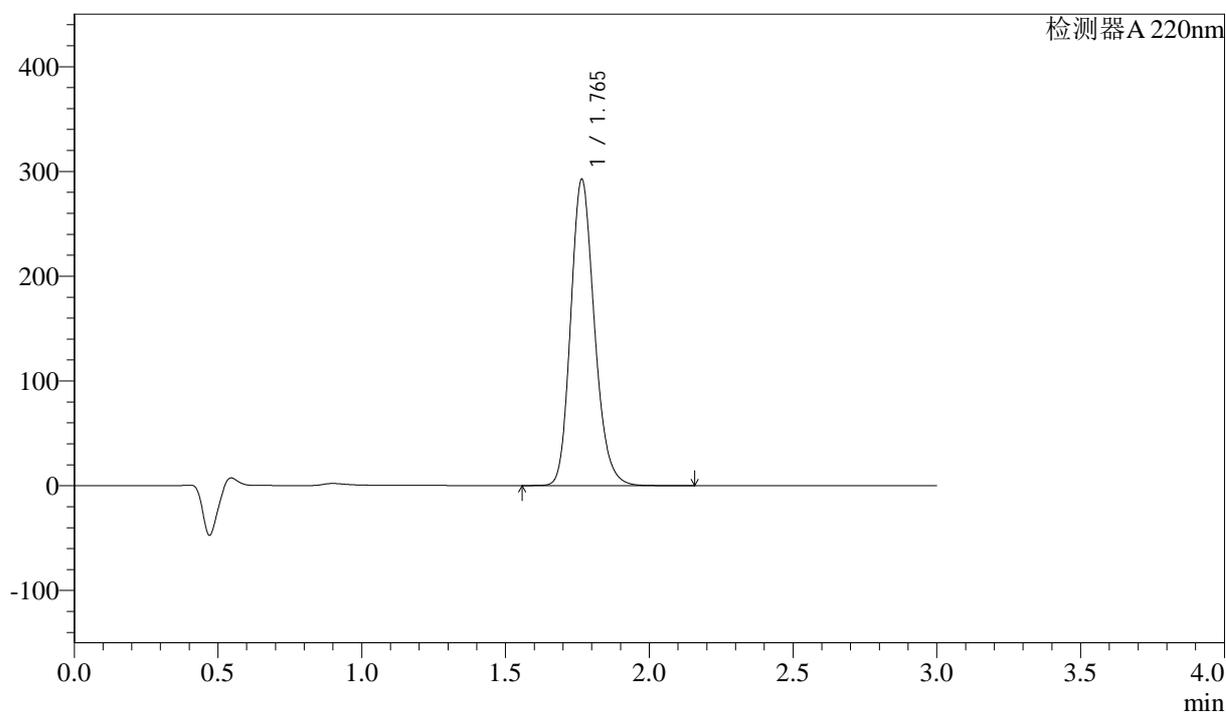

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1676127 | 292108 | 100.000 | 2237       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1676127 | 292108 | 100.000 |            |       |          |


图41 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-2

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-42-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 14:16:09 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:54:36 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

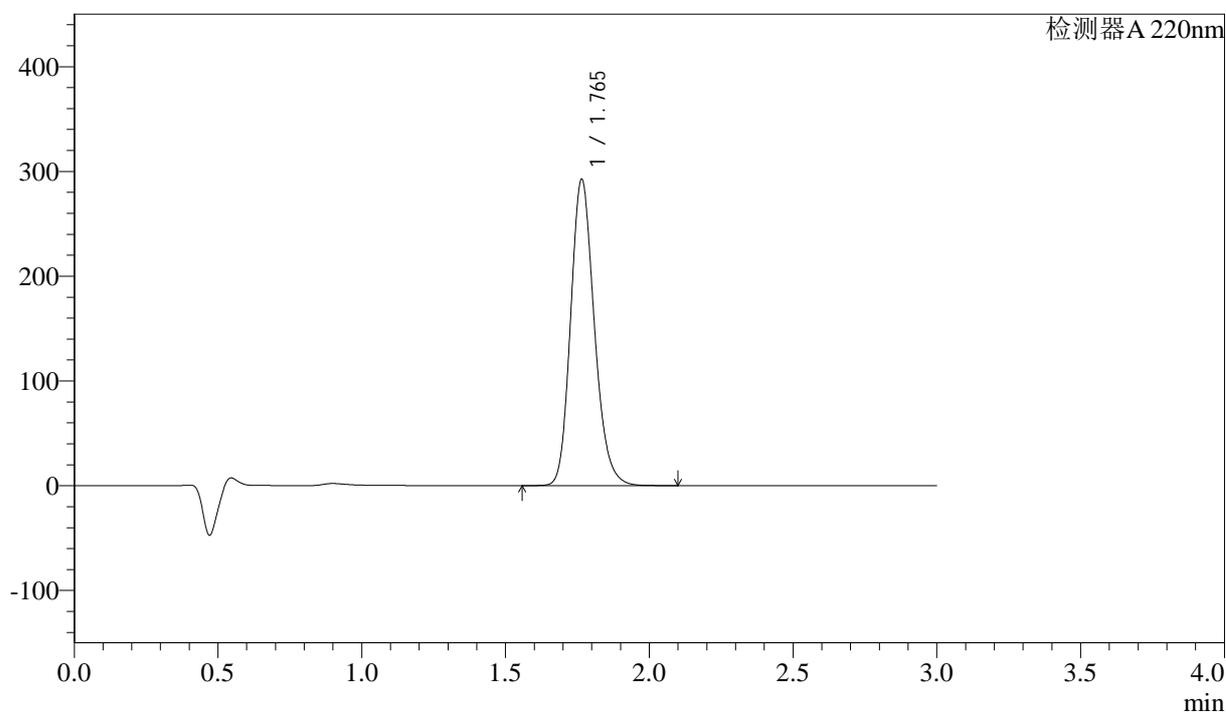

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1675568 | 292247 | 100.000 | 2237       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1675568 | 292247 | 100.000 |            |       |          |


图42 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-3

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-43-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 14:19:33 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:54:38 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

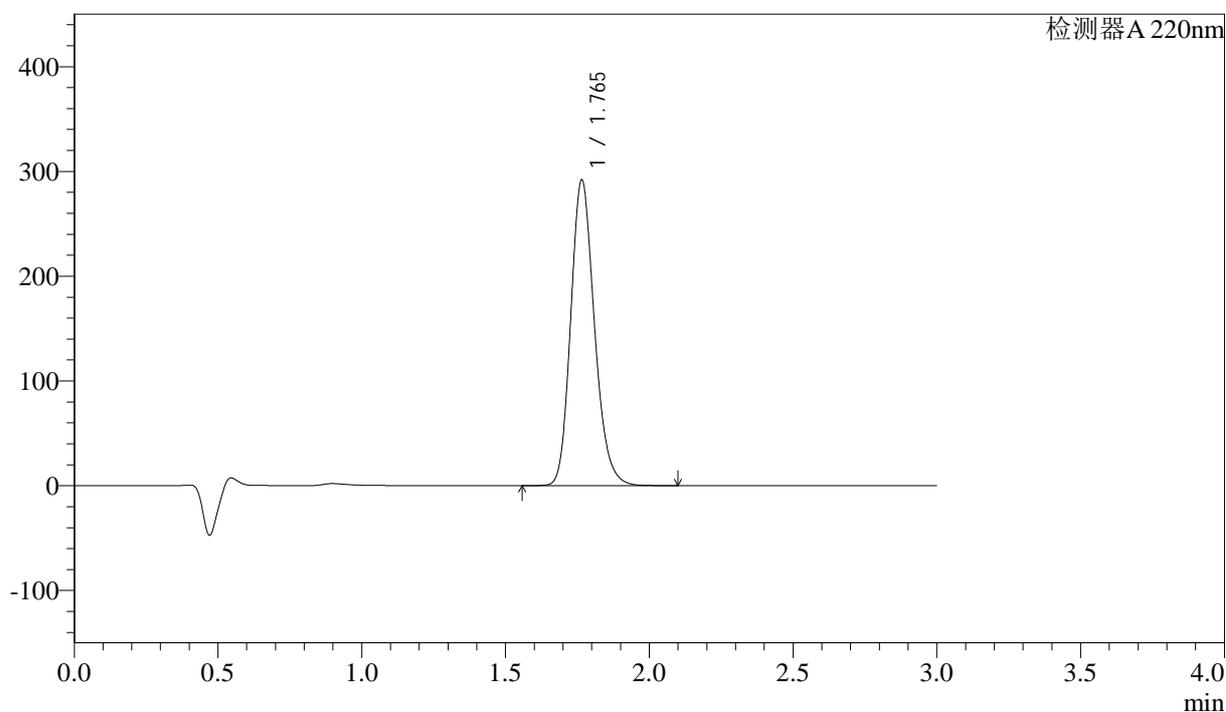

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1673837 | 291480 | 100.000 | 2234       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1673837 | 291480 | 100.000 |            |       |          |


图43 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-4

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-44-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 14:22:57 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:54:41 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

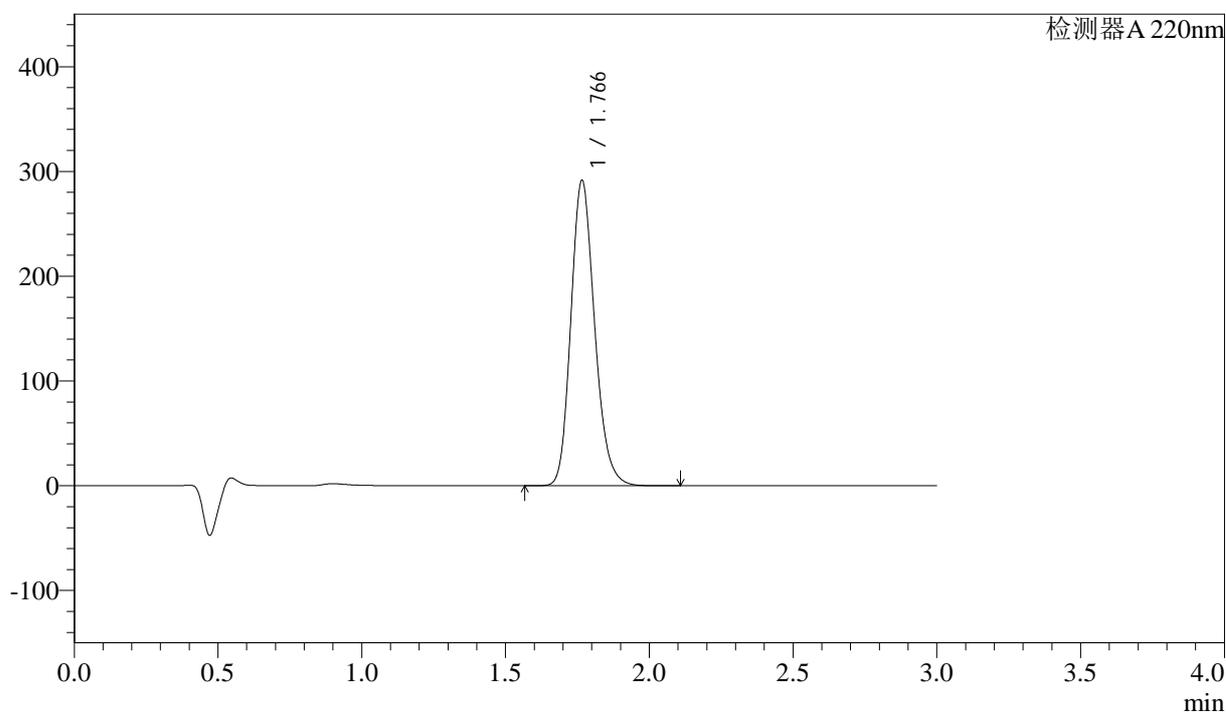

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1674405 | 291047 | 100.000 | 2230       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1674405 | 291047 | 100.000 |            |       |          |


图44 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-5

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-45-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 14:26:26 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:54:43 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

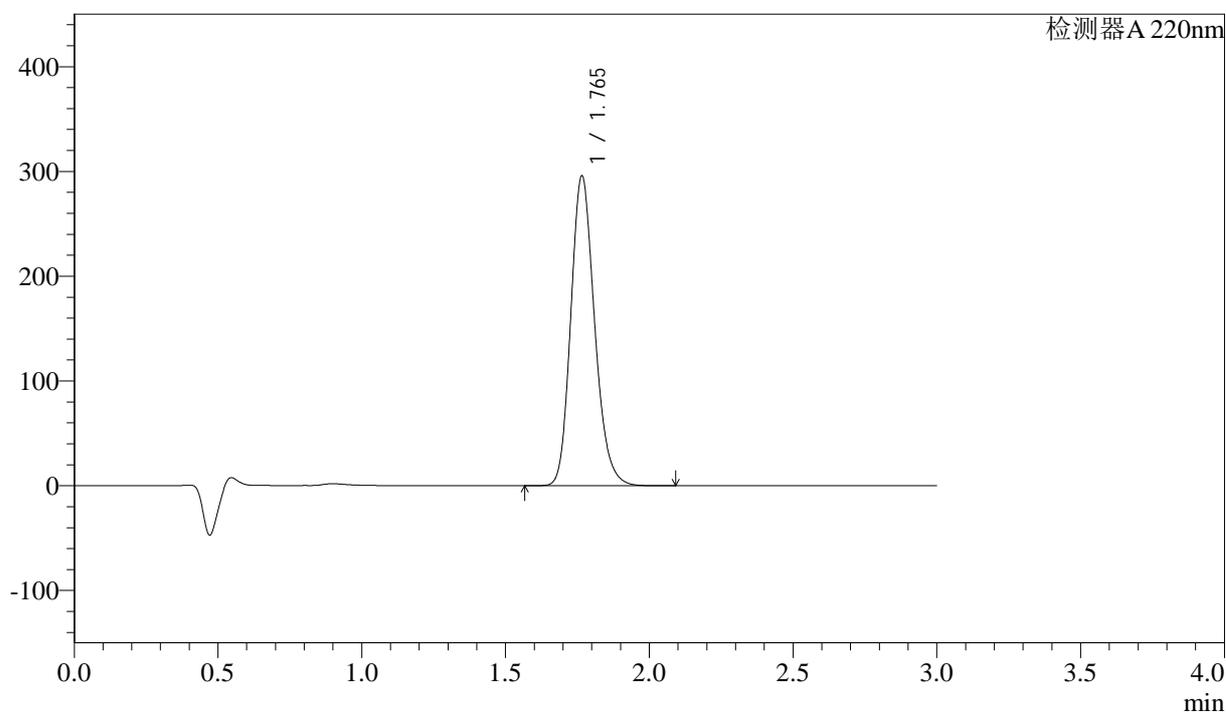

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1702372 | 295417 | 100.000 | 2221       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1702372 | 295417 | 100.000 |            |       |          |


图45 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-46-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 14:29:50 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:54:46 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

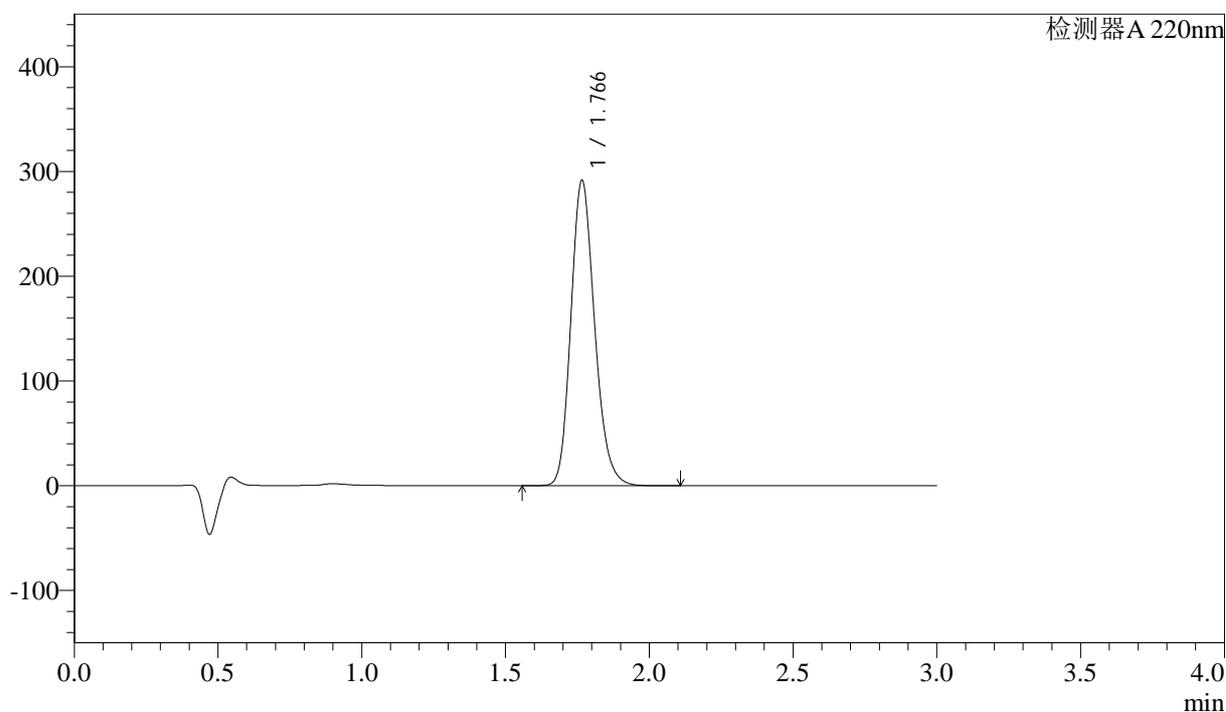

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1676236 | 291020 | 100.000 | 2226       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1676236 | 291020 | 100.000 |            |       |          |


图46 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-47-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 14:33:13      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/01 08:54:48 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

### <色谱图>

mV

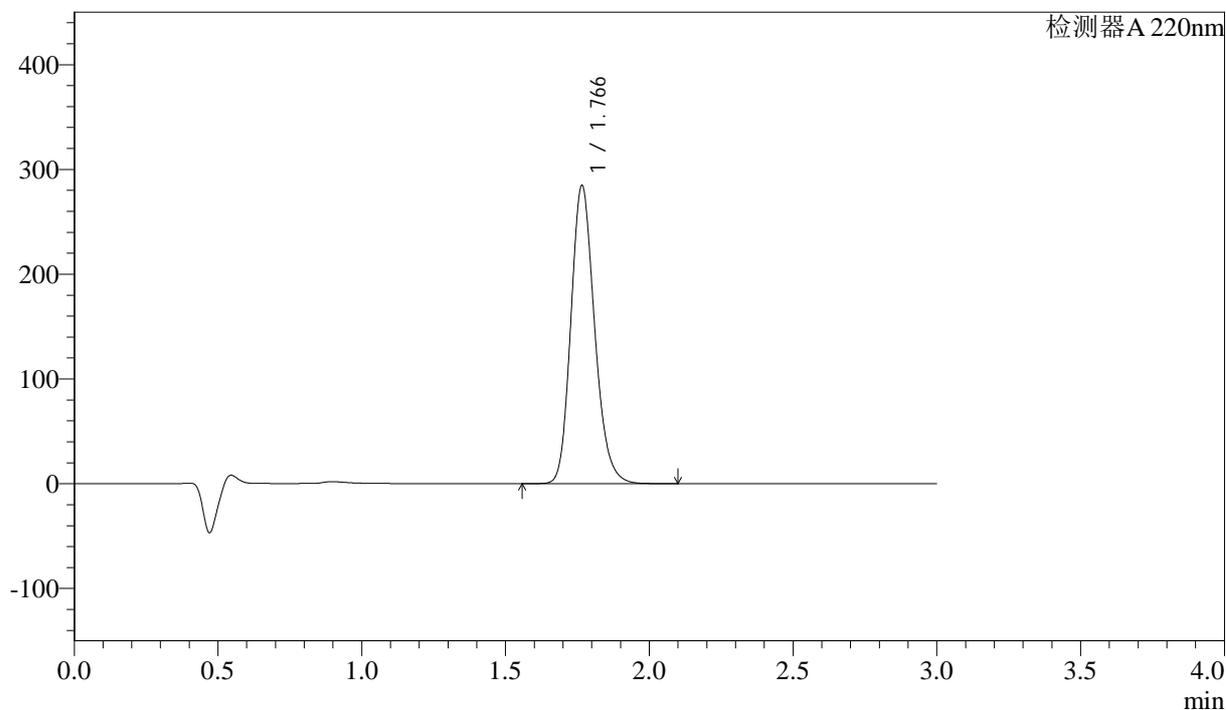

### <峰表>

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1633804 | 284119 | 100.000 | 2232       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1633804 | 284119 | 100.000 |            |       |          |


图47 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-48-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 14:36:36 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:54:51 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

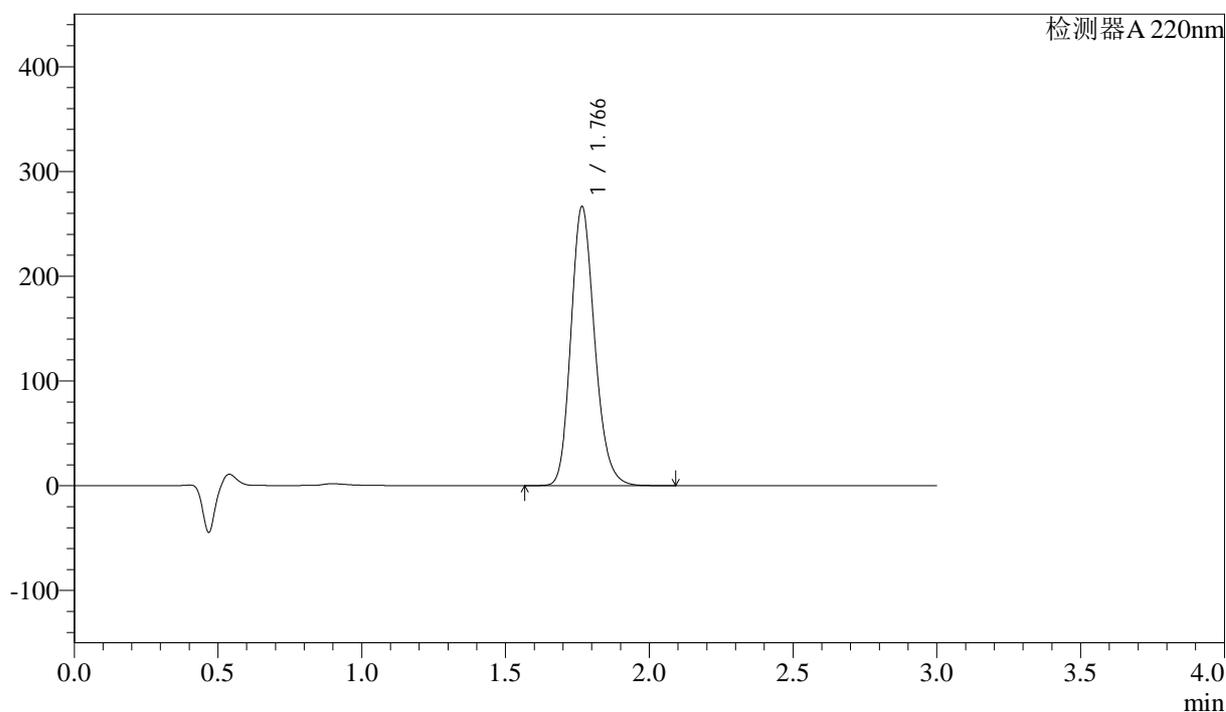

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1528933 | 265884 | 100.000 | 2234       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1528933 | 265884 | 100.000 |            |       |          |


图48 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-49-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 14:40:00 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:54:54 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

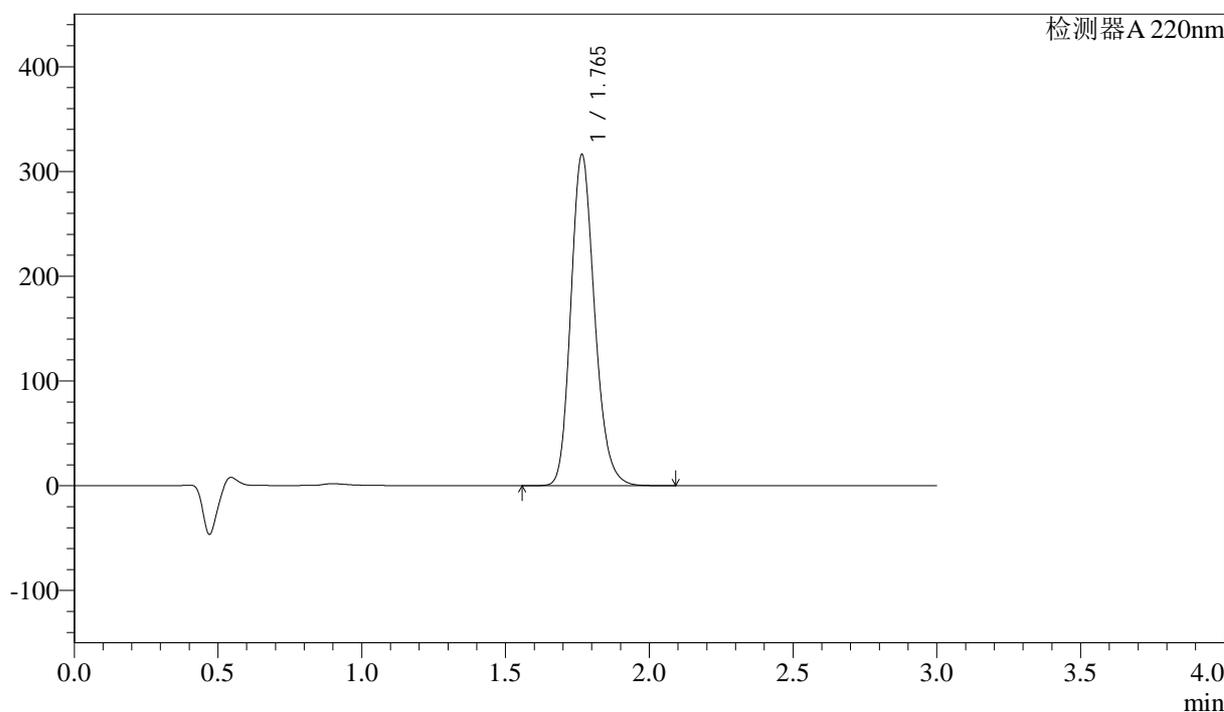

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1817373 | 315619 | 100.000 | 2225       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1817373 | 315619 | 100.000 |            |       |          |


图49 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-50-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 14:43:22 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:54:56 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

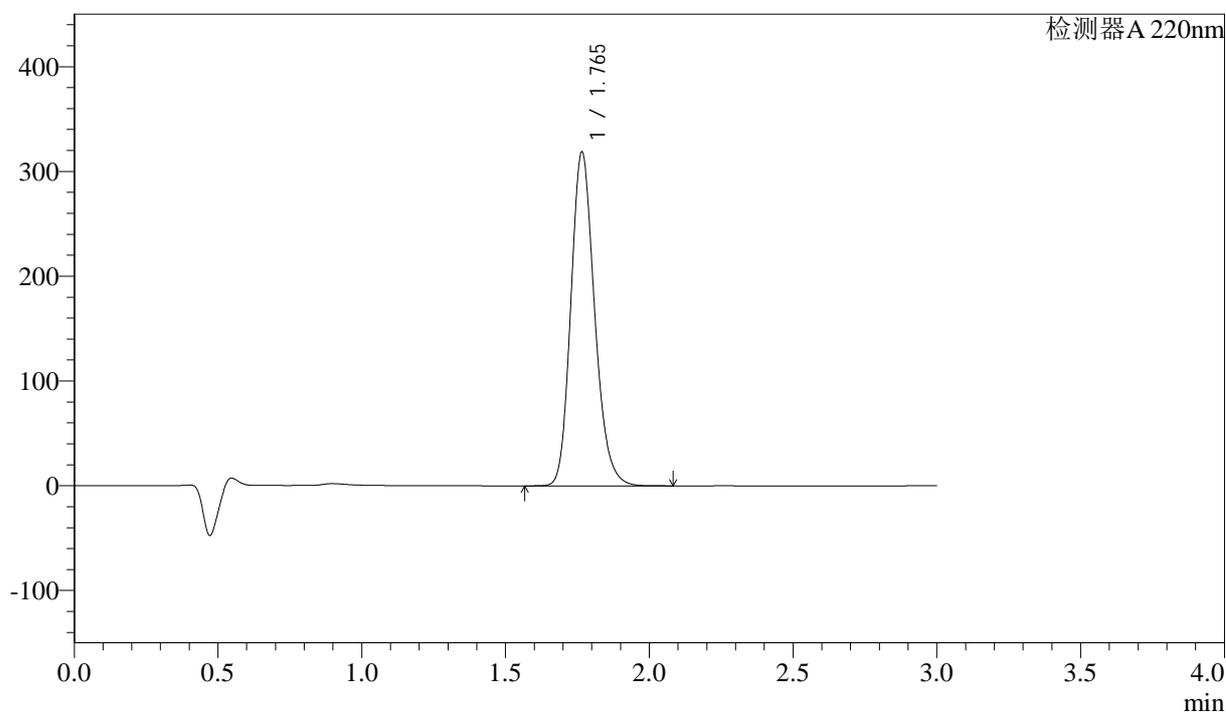

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1829388 | 318199 | 100.000 | 2231       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1829388 | 318199 | 100.000 |            |       |          |


图50 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-51-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 14:46:46      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/01 08:54:59 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV

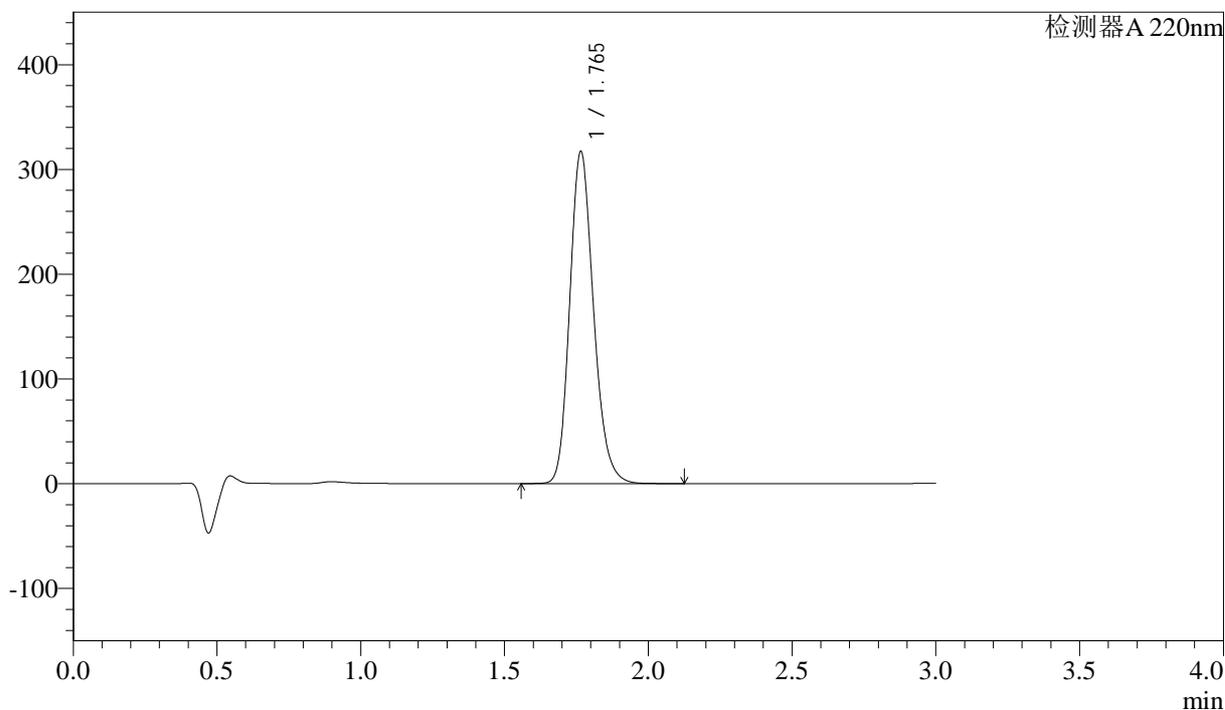

<峰表>

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1822974 | 316684 | 100.000 | 2225       | 1.188 | --       |
| 总计 |       | 1822974 | 316684 | 100.000 |            |       |          |


图51 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-52-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-11  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 14:50:09 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:55:02 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

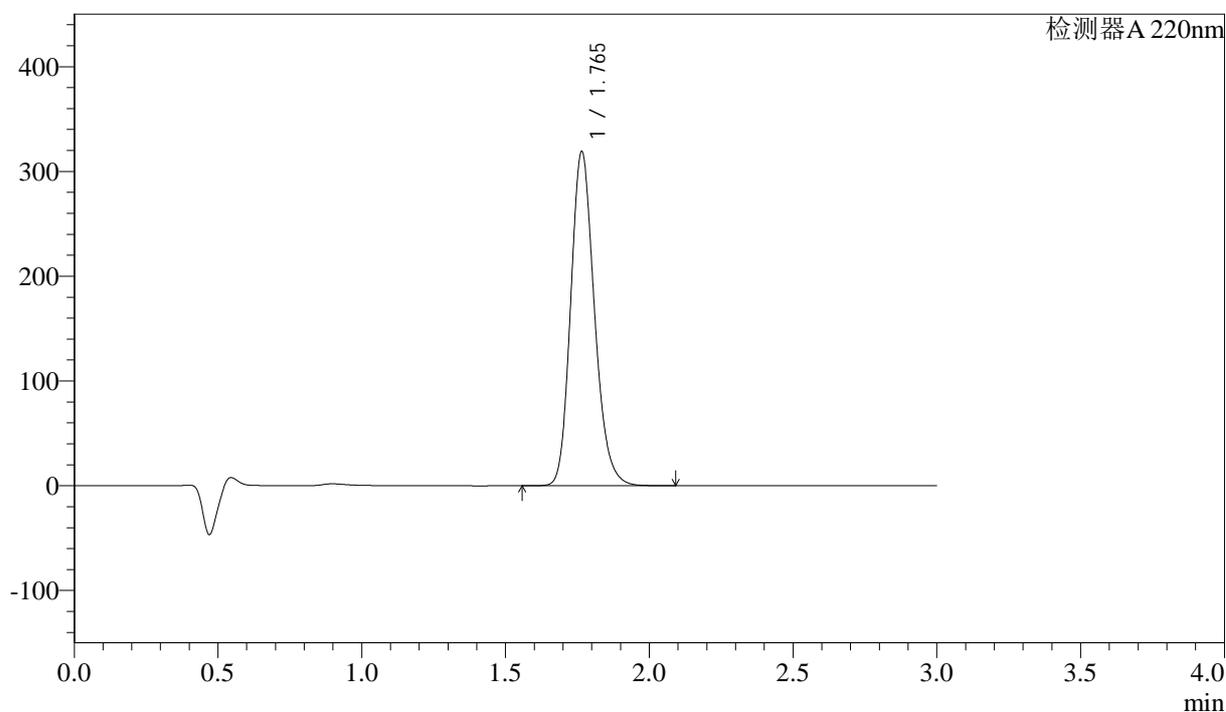

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1833091 | 318727 | 100.000 | 2225       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1833091 | 318727 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-53-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-20  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 14:53:32 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:55:04 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

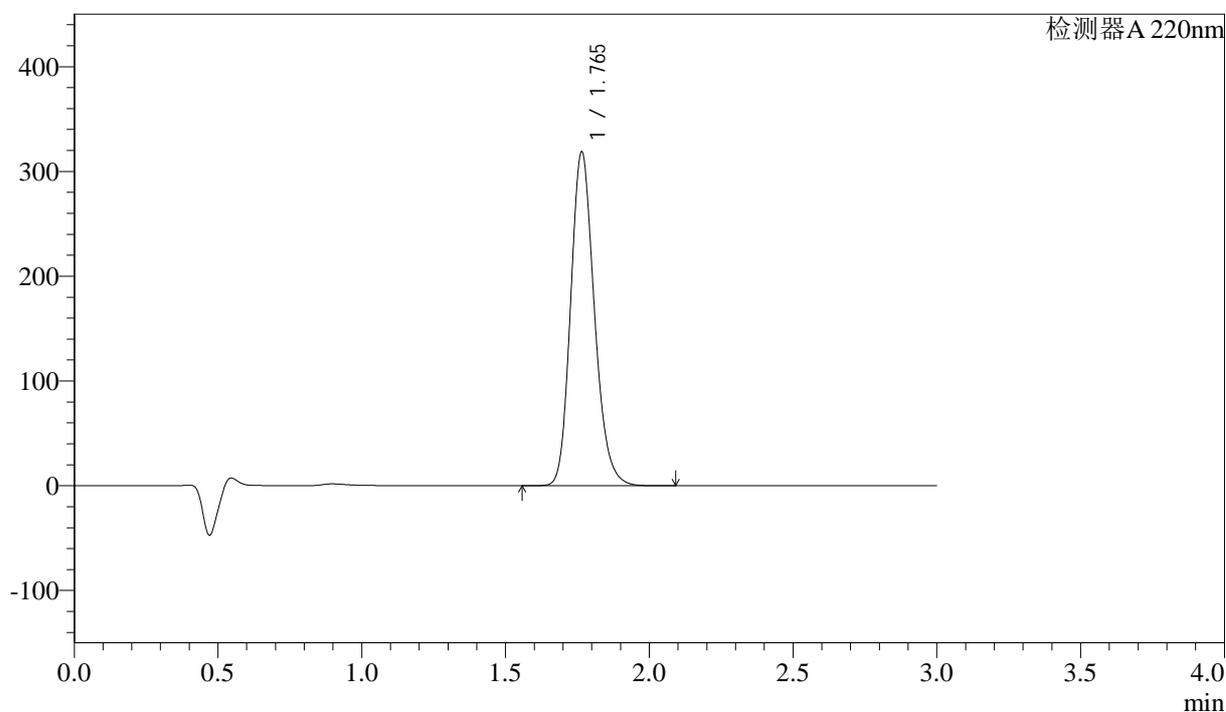

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1829291 | 318513 | 100.000 | 2229       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1829291 | 318513 | 100.000 |            |       |          |


图53 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-54-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 14:56:56 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:55:07 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

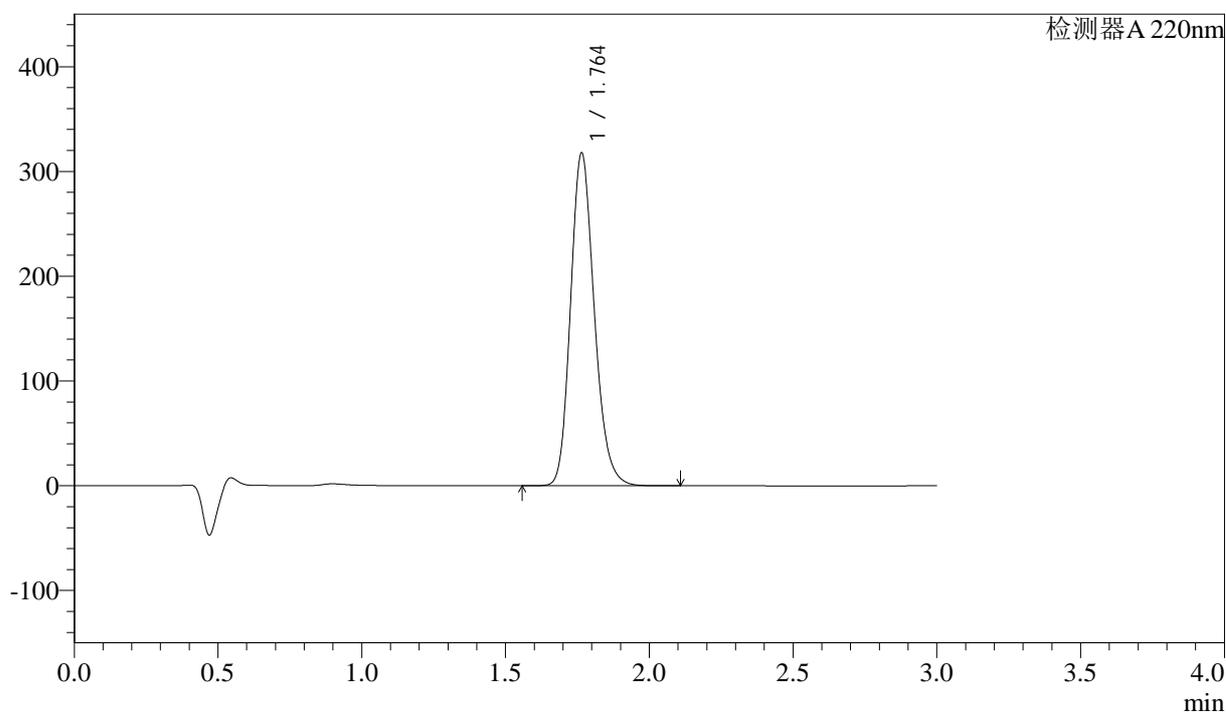

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.764 | 1822958 | 317619 | 100.000 | 2231       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1822958 | 317619 | 100.000 |            |       |          |


图54 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-55-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 15:00:19 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:55:09 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

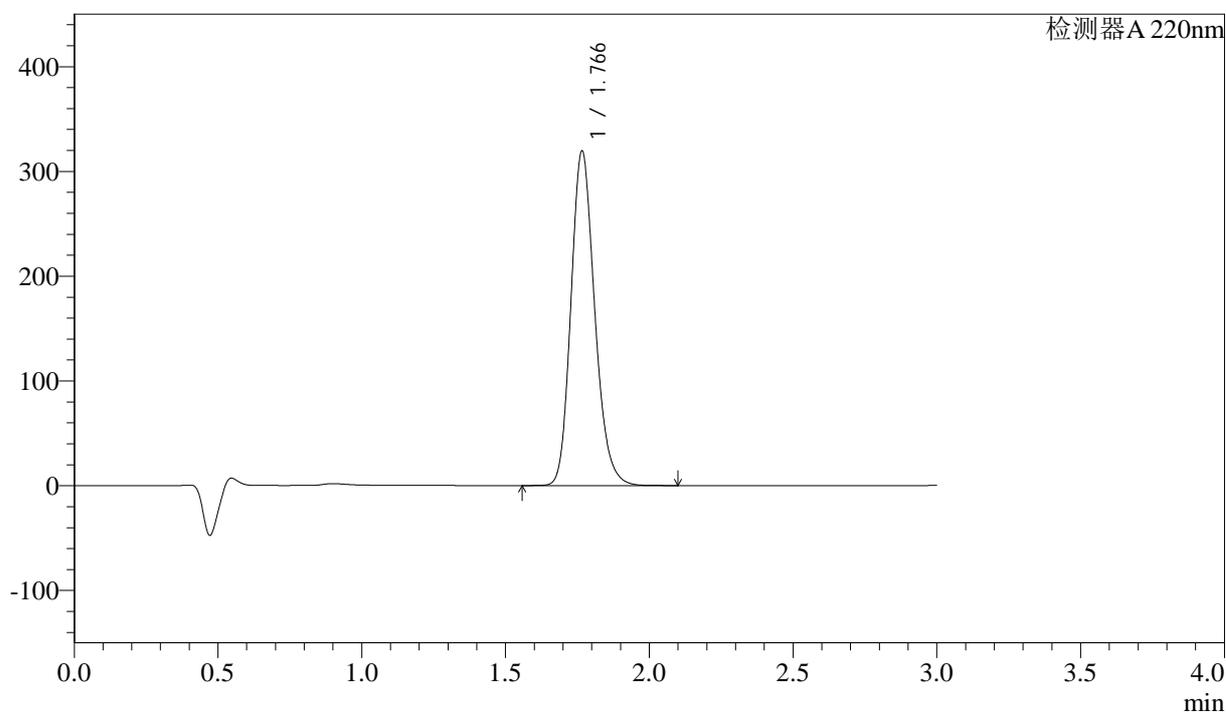

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1833933 | 318678 | 100.000 | 2231       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1833933 | 318678 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-56-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 15:03:43 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:55:12 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

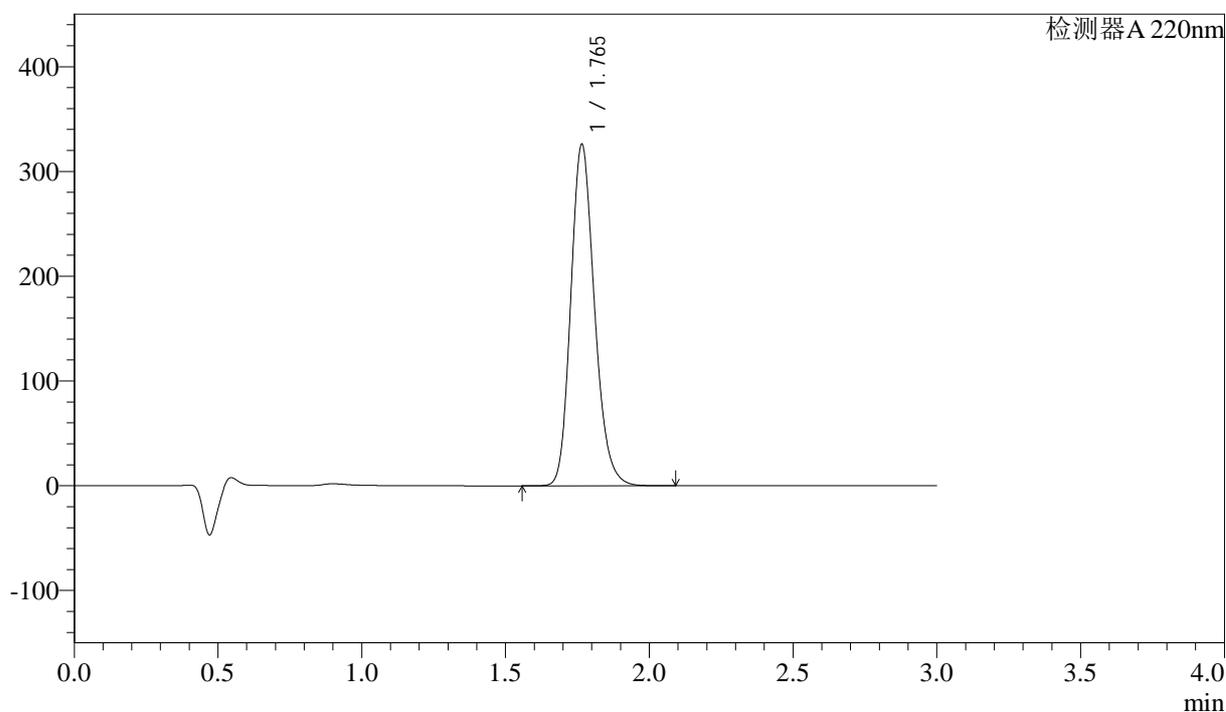

## &lt;峰表&gt;

检测器 A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1869846 | 325603 | 100.000 | 2234       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1869846 | 325603 | 100.000 |            |       |          |


图56 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-57-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 15:07:07 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:55:14 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

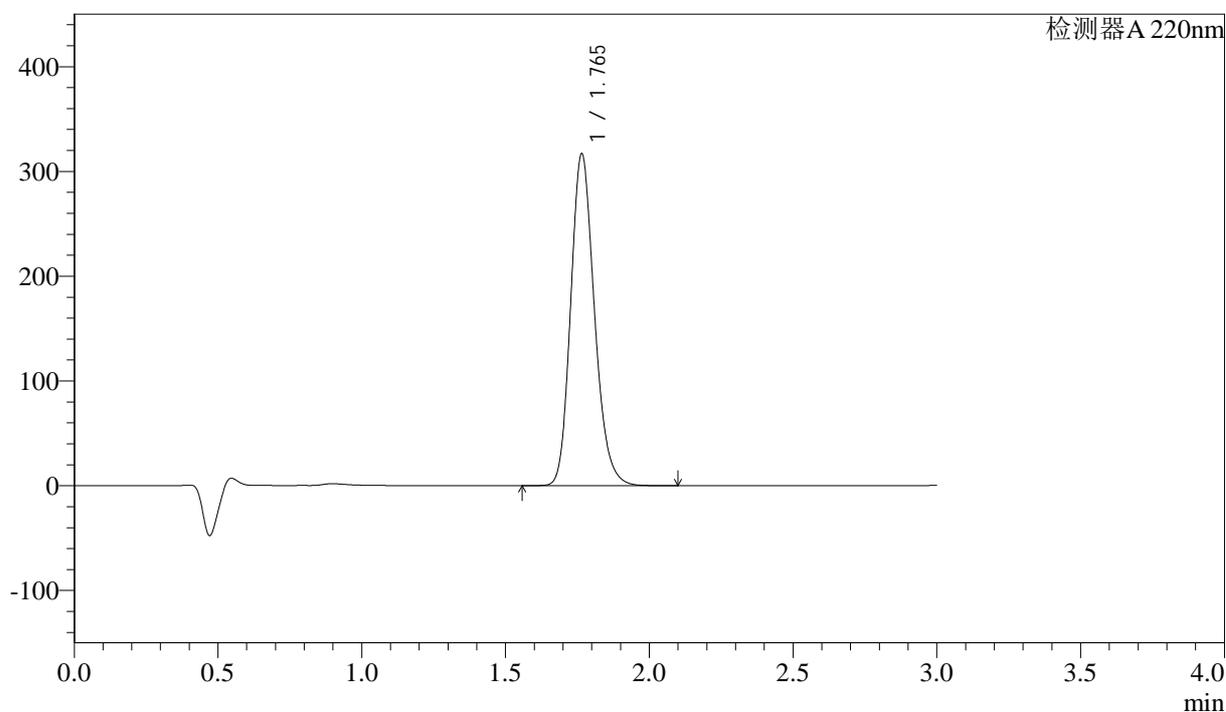

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1819272 | 316539 | 100.000 | 2228       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1819272 | 316539 | 100.000 |            |       |          |


图57 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-58-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-12  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 15:10:31 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:55:17 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

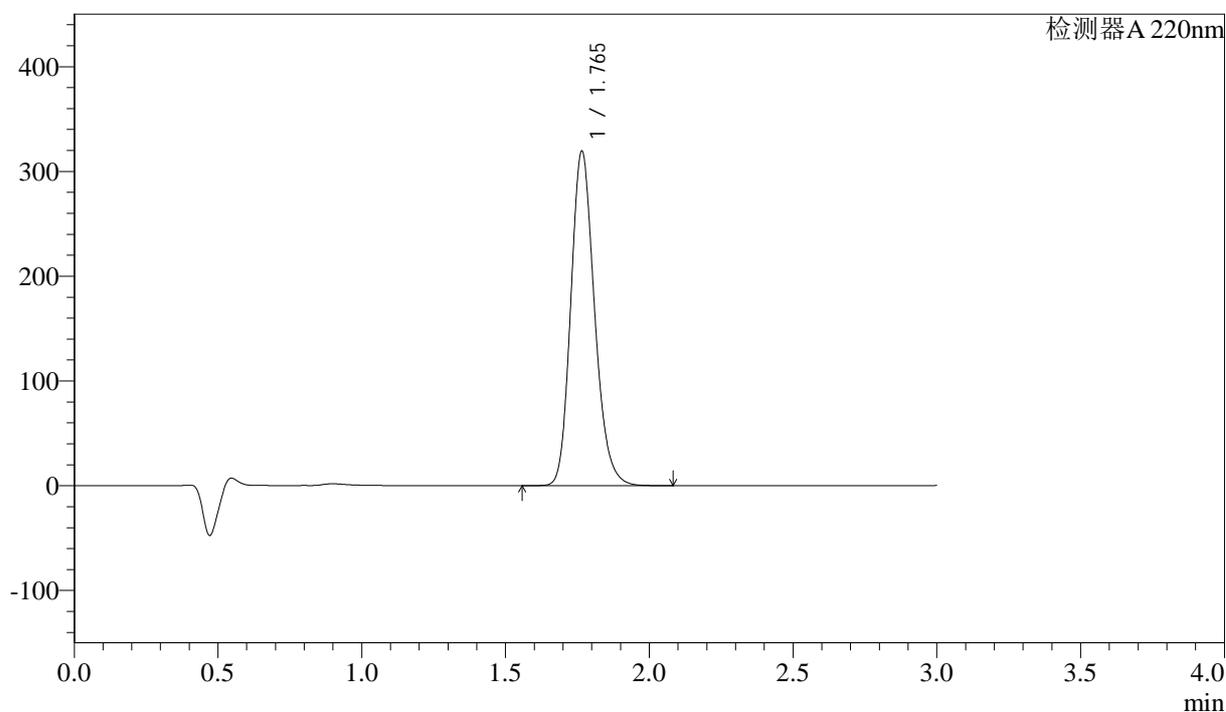

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1834773 | 318947 | 100.000 | 2227       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1834773 | 318947 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-59-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 15:13:55 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:55:19 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

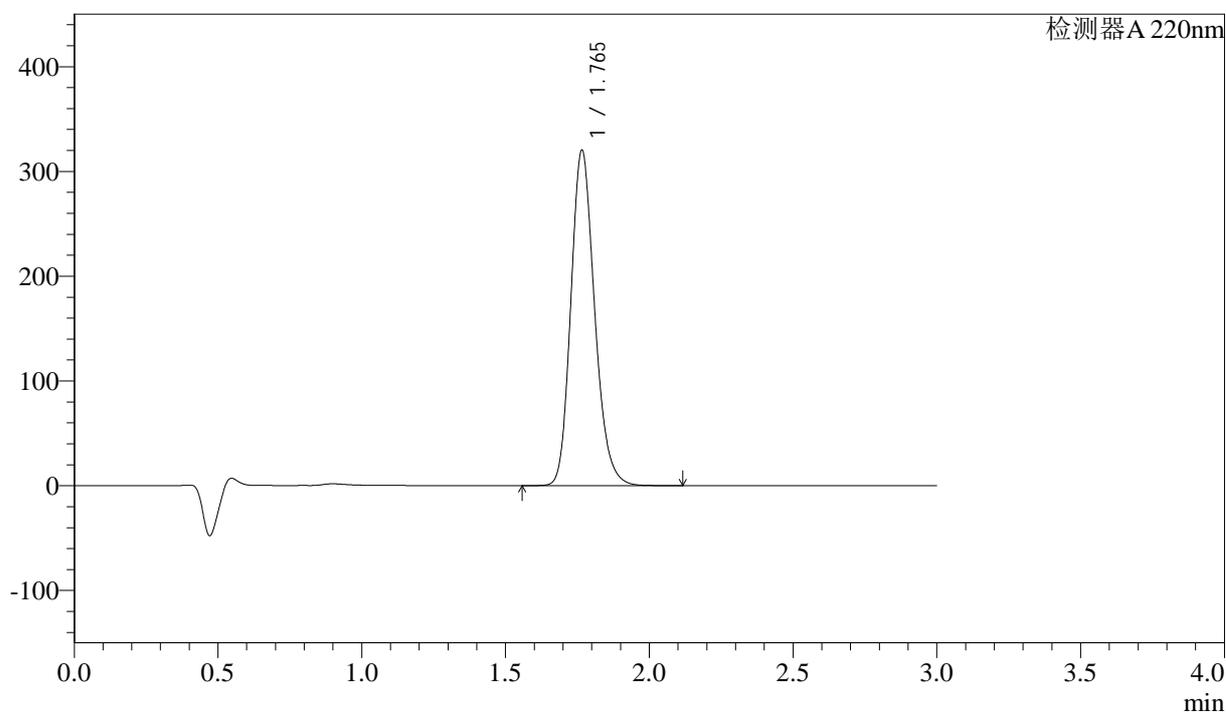

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1840291 | 319659 | 100.000 | 2227       | 1.188 | --       |
| 总计 |       | 1840291 | 319659 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-60-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-30  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 15:17:19 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:55:22 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

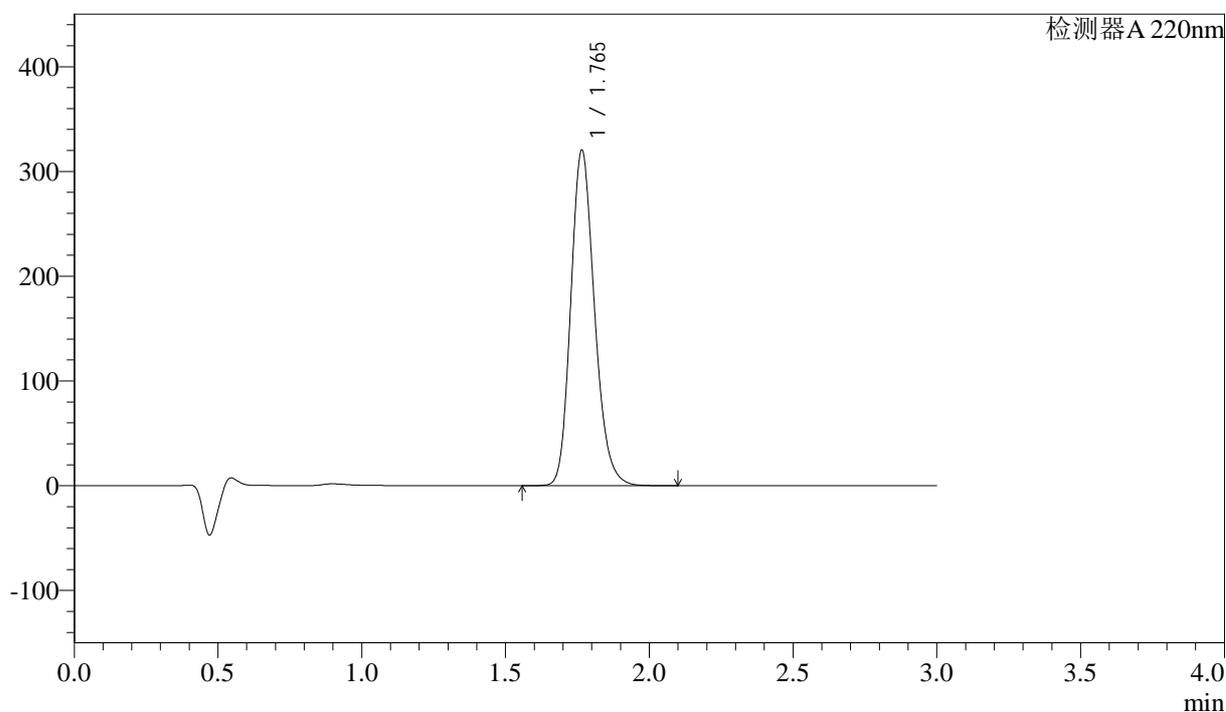

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1840467 | 319918 | 100.000 | 2227       | 1.188 | --       |
| 总计 |       | 1840467 | 319918 | 100.000 |            |       |          |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-61-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 15:20:43      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/01 08:55:24 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV

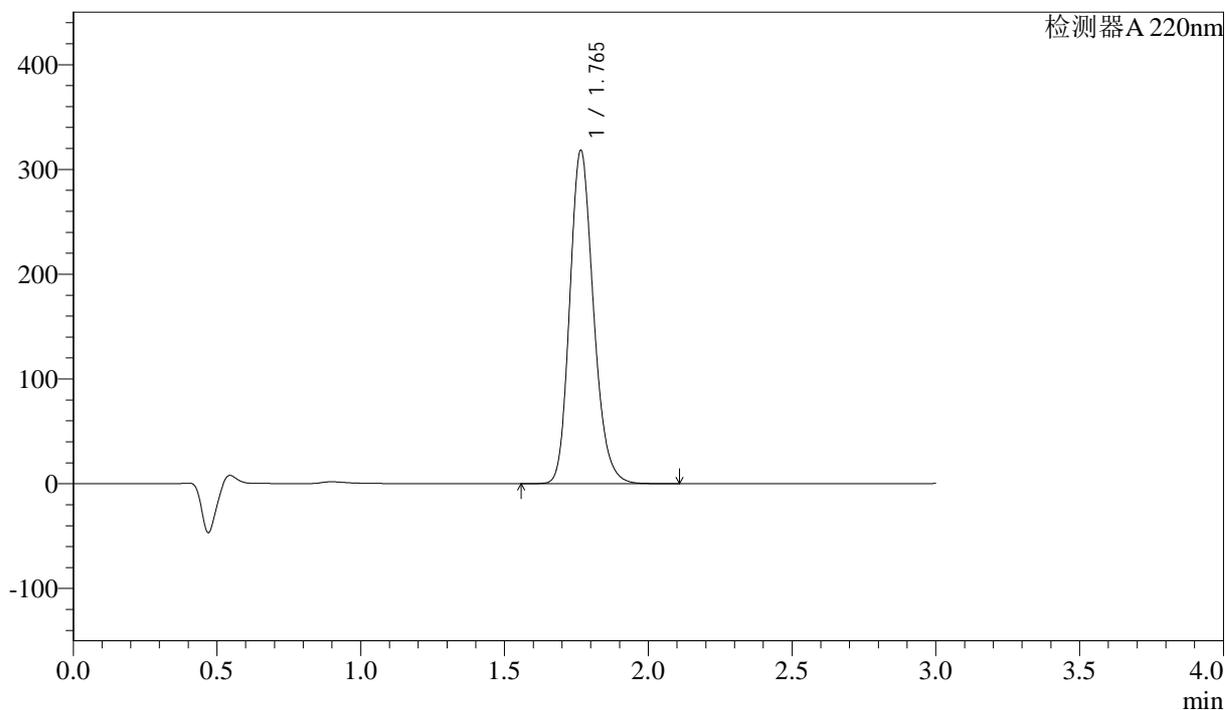

<峰表>

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1826749 | 317880 | 100.000 | 2231       | 1.189 | --       |
| 总计 |       | 1826749 | 317880 | 100.000 |            |       |          |


图61 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-62-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 15:24:07 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:55:27 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

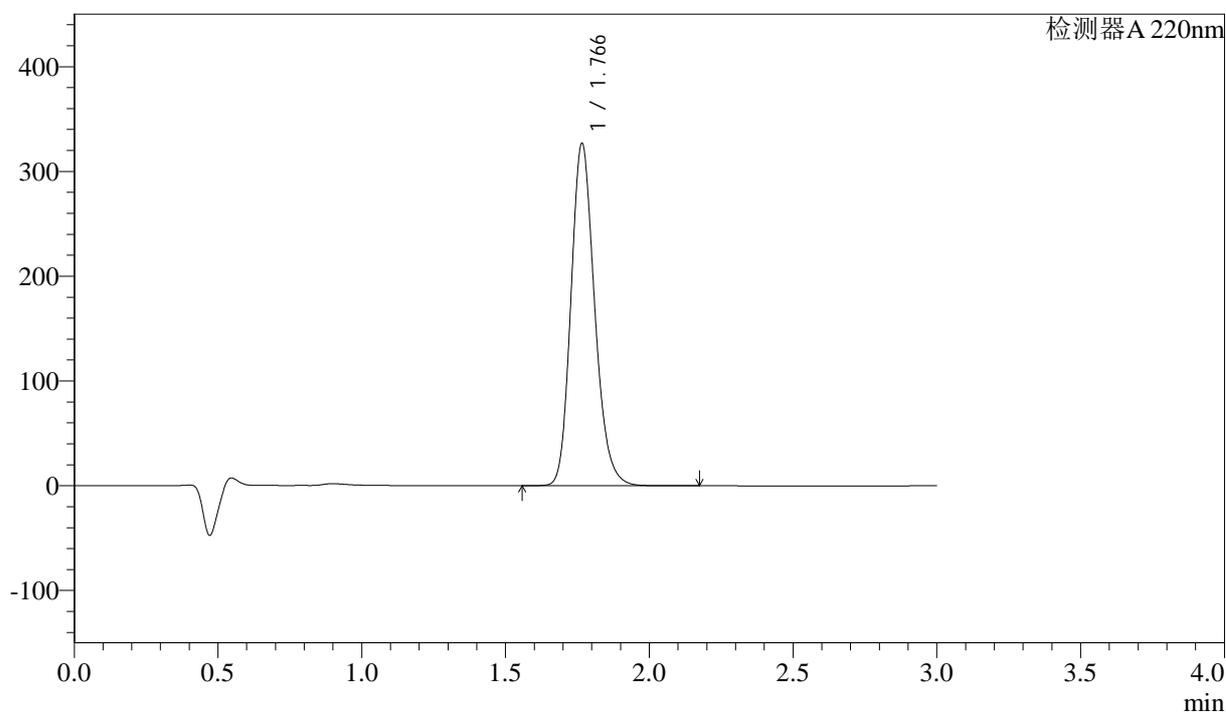

## &lt;峰表&gt;

检测器 A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1872402 | 326115 | 100.000 | 2242       | 1.188 | --       |
| 总计 |       | 1872402 | 326115 | 100.000 |            |       |          |


图62 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-63-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-4  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 15:27:31 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:55:29 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

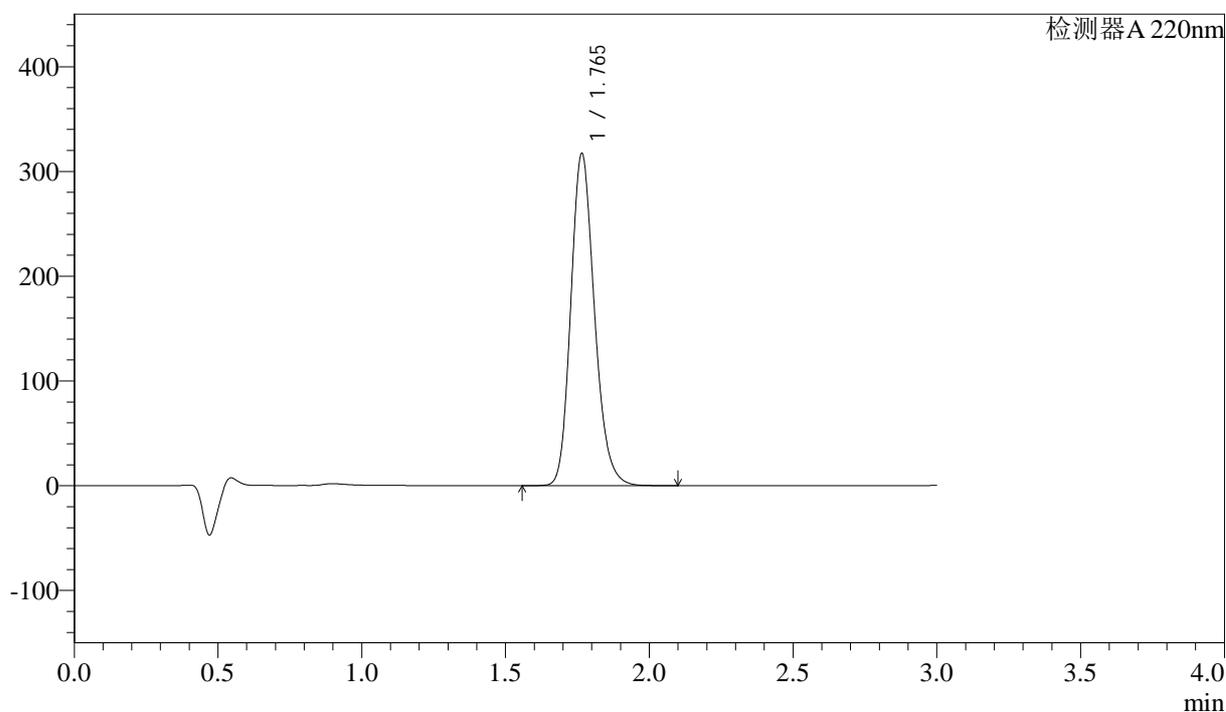

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1814352 | 316659 | 100.000 | 2246       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1814352 | 316659 | 100.000 |            |       |          |


图63 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-64-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-13  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 15:30:55 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:55:32 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

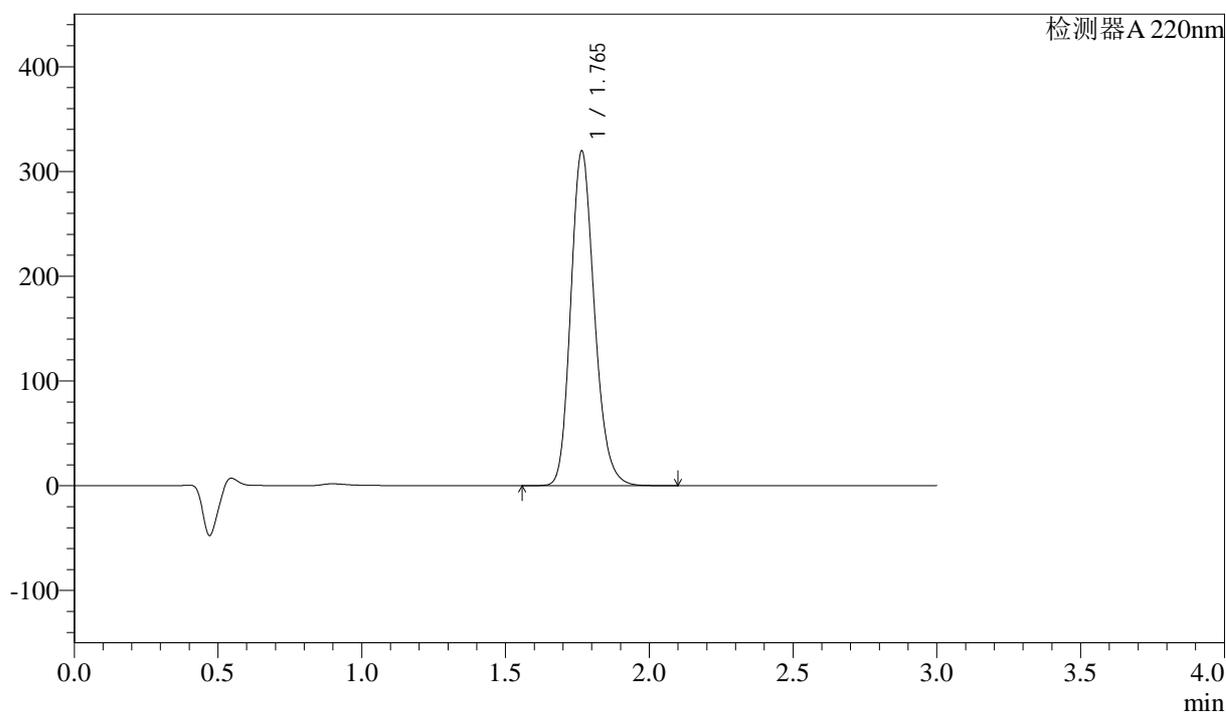

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1829783 | 319150 | 100.000 | 2241       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1829783 | 319150 | 100.000 |            |       |          |


图64 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-65-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 15:34:19 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:55:34 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

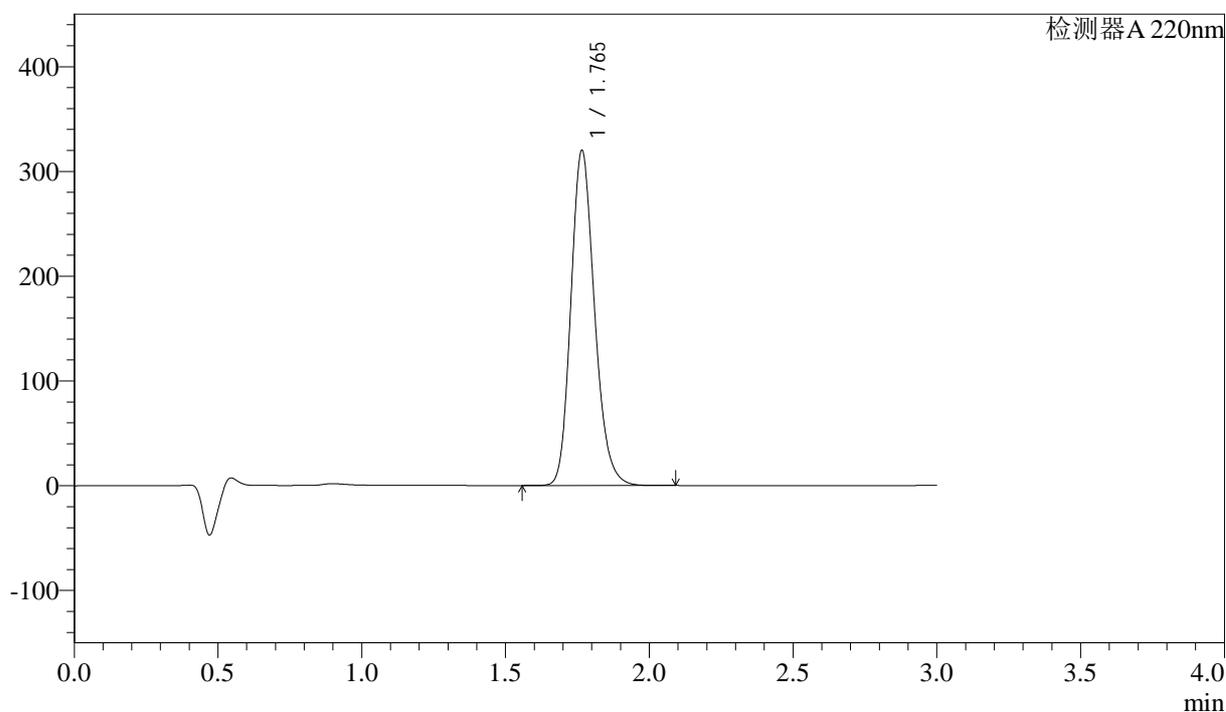

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1830020 | 319320 | 100.000 | 2246       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1830020 | 319320 | 100.000 |            |       |          |


图65 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-66-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-31  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 15:37:43 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:55:37 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

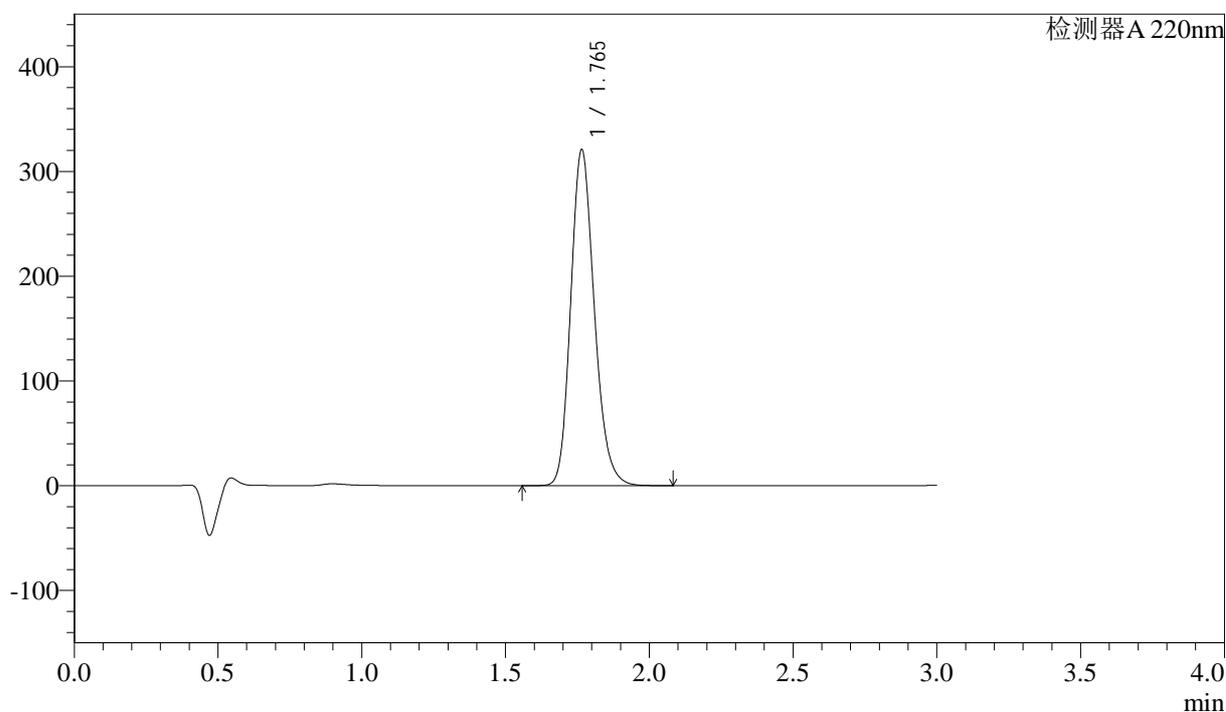

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1831955 | 320520 | 100.000 | 2253       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1831955 | 320520 | 100.000 |            |       |          |


图66 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-67-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-40  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 15:41:07 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:55:40 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

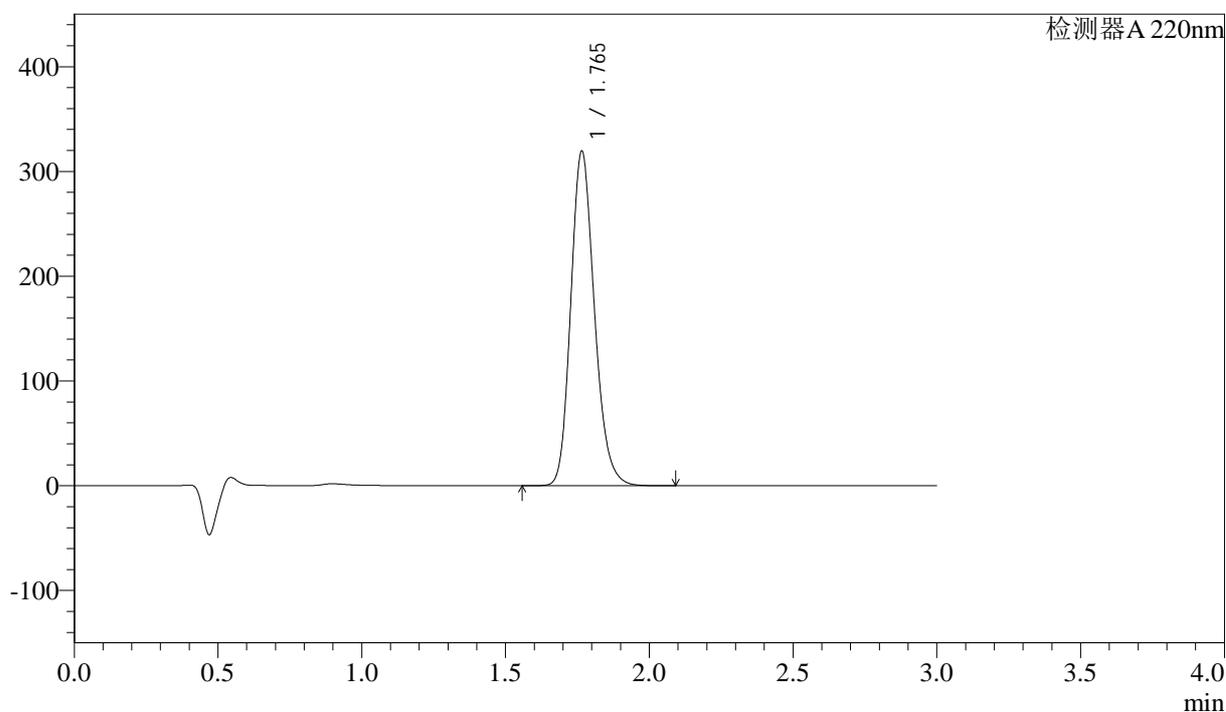

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1825782 | 318998 | 100.000 | 2249       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1825782 | 318998 | 100.000 |            |       |          |


图67 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-68-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 15:44:31 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:55:42 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

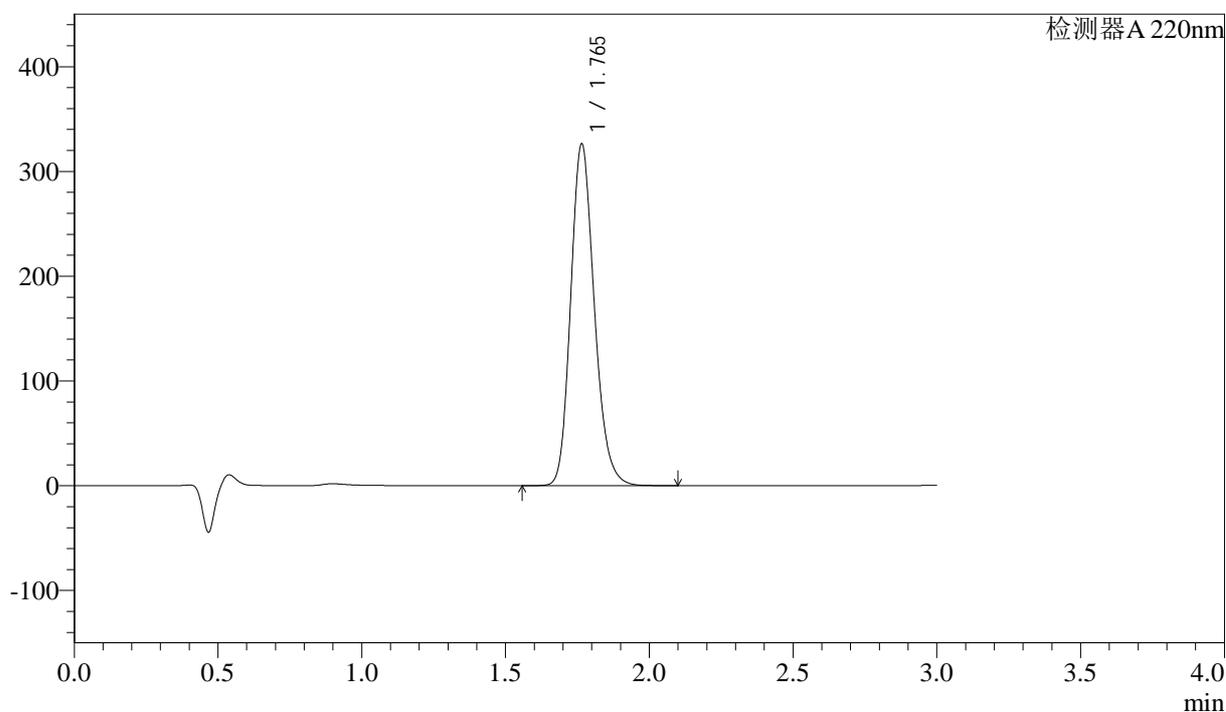

## &lt;峰表&gt;

检测器 A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1864331 | 326070 | 100.000 | 2251       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1864331 | 326070 | 100.000 |            |       |          |


图68 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-69-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-5  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 15:47:55      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/01 08:55:45 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV

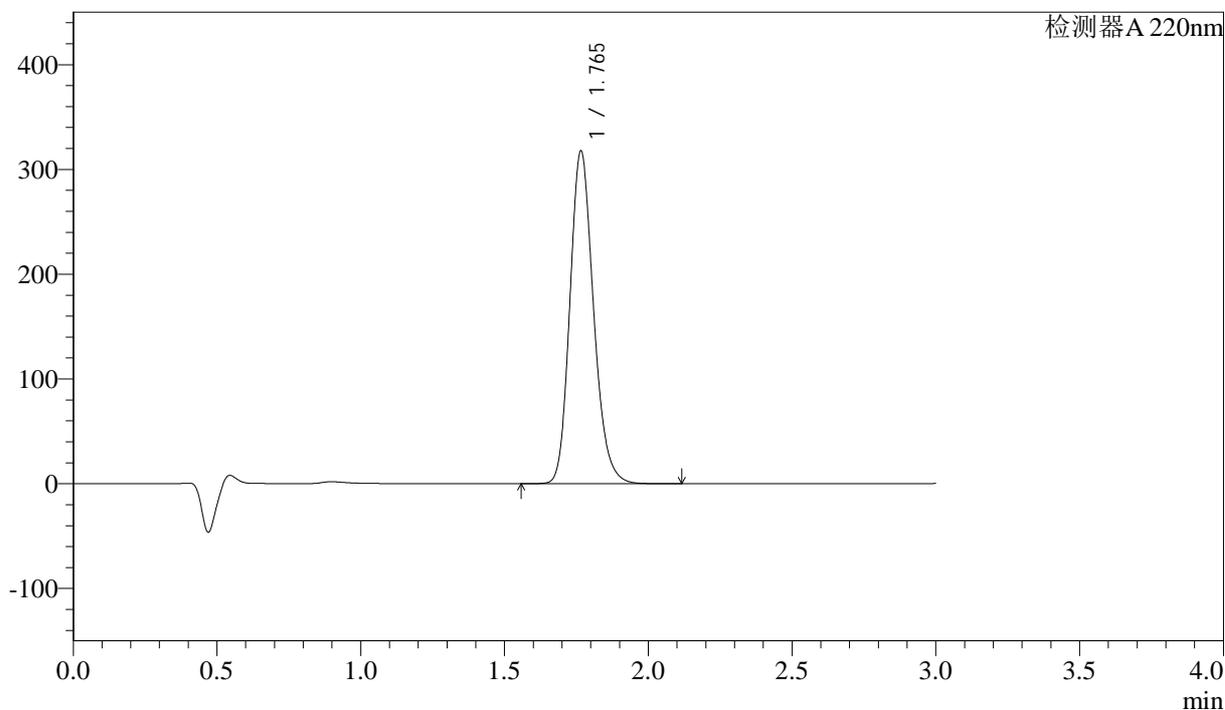

<峰表>

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1814733 | 317103 | 100.000 | 2253       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1814733 | 317103 | 100.000 |            |       |          |


图69 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-70-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-14  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 15:51:19      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/01 08:55:47 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

### <色谱图>

mV

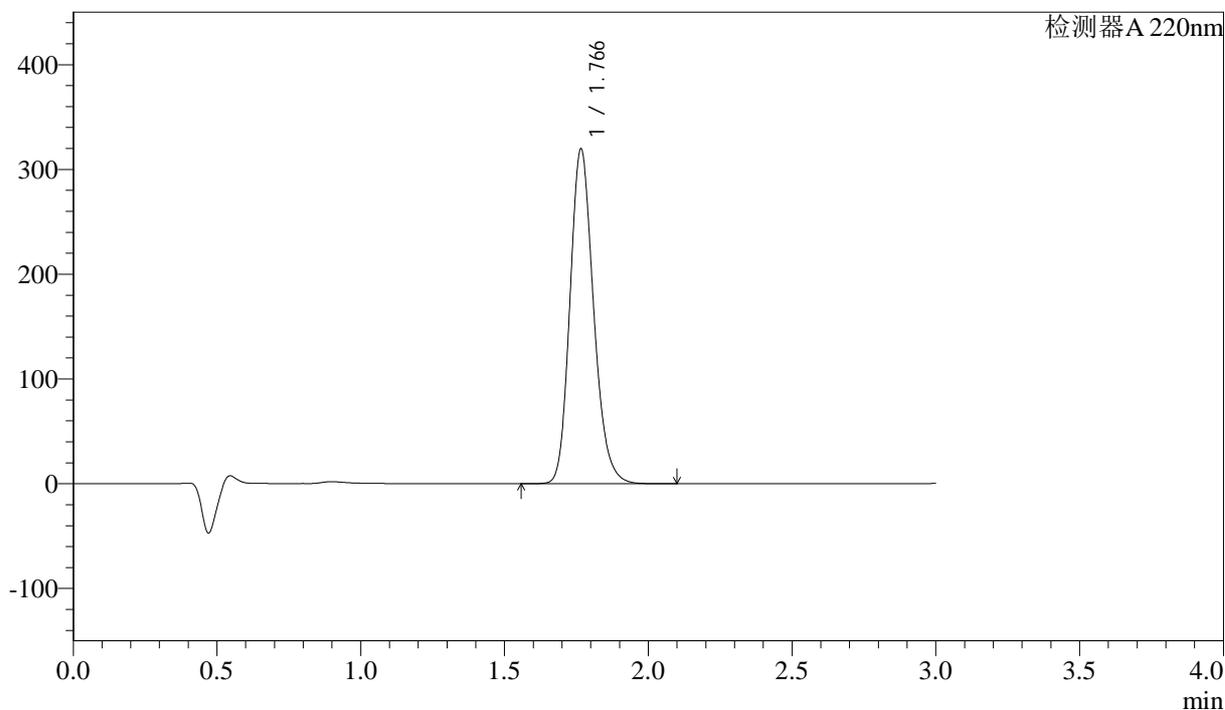

### <峰表>

检测器 A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1827031 | 318929 | 100.000 | 2250       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1827031 | 318929 | 100.000 |            |       |          |


图70 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-71-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-23  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 15:54:43 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:55:50 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

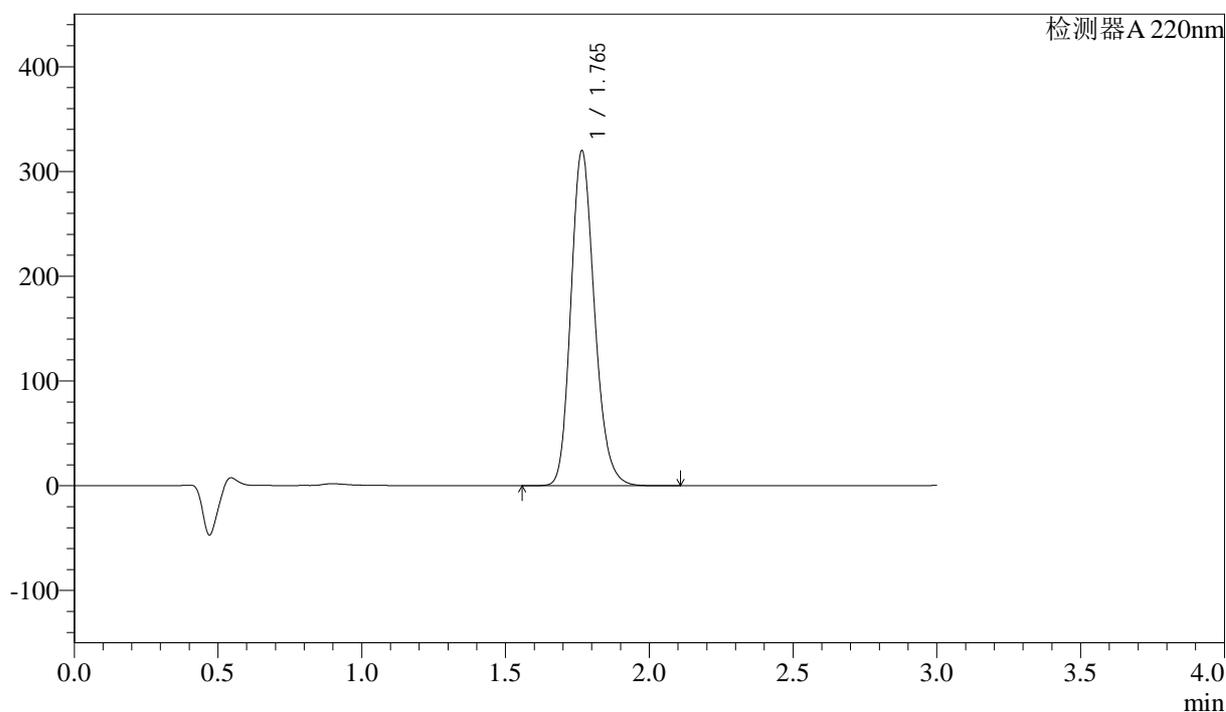

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1827971 | 319326 | 100.000 | 2251       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1827971 | 319326 | 100.000 |            |       |          |


图71 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-72-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-32  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 15:58:07 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:55:52 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

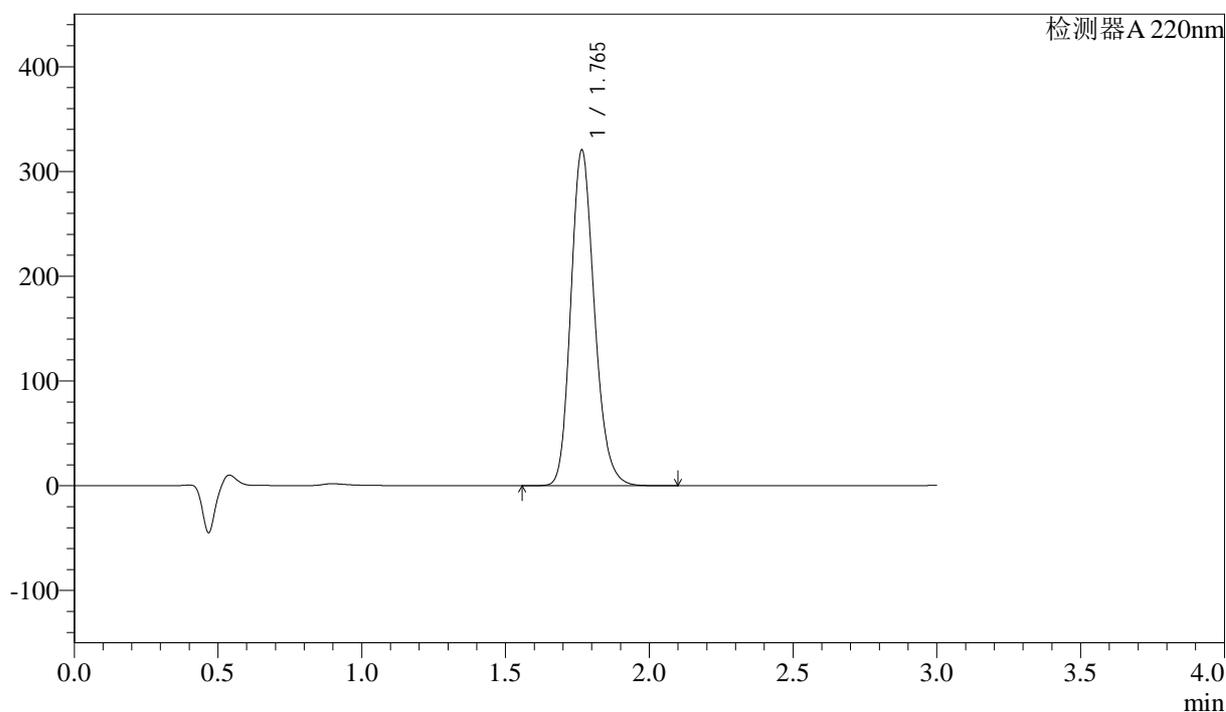

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1831466 | 320078 | 100.000 | 2251       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1831466 | 320078 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-73-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-41  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 16:01:31 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:55:55 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

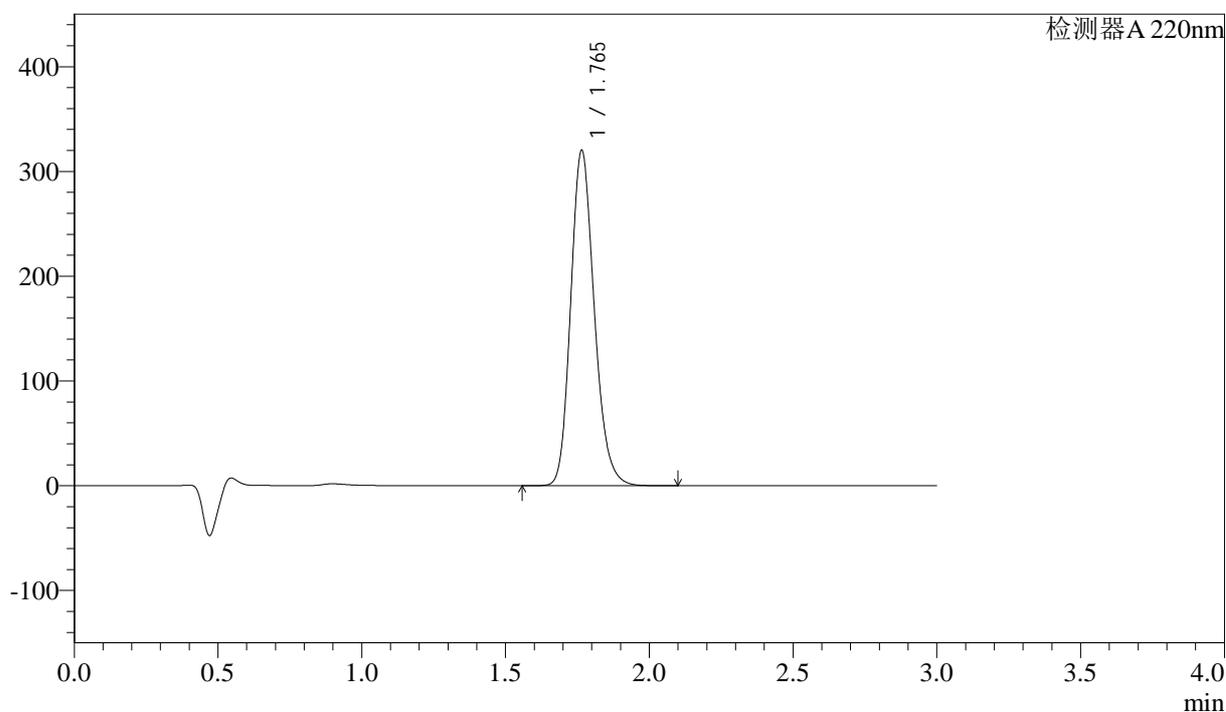

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1825842 | 319925 | 100.000 | 2261       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1825842 | 319925 | 100.000 |            |       |          |


图73 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-74-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-50  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 16:04:55 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:55:58 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

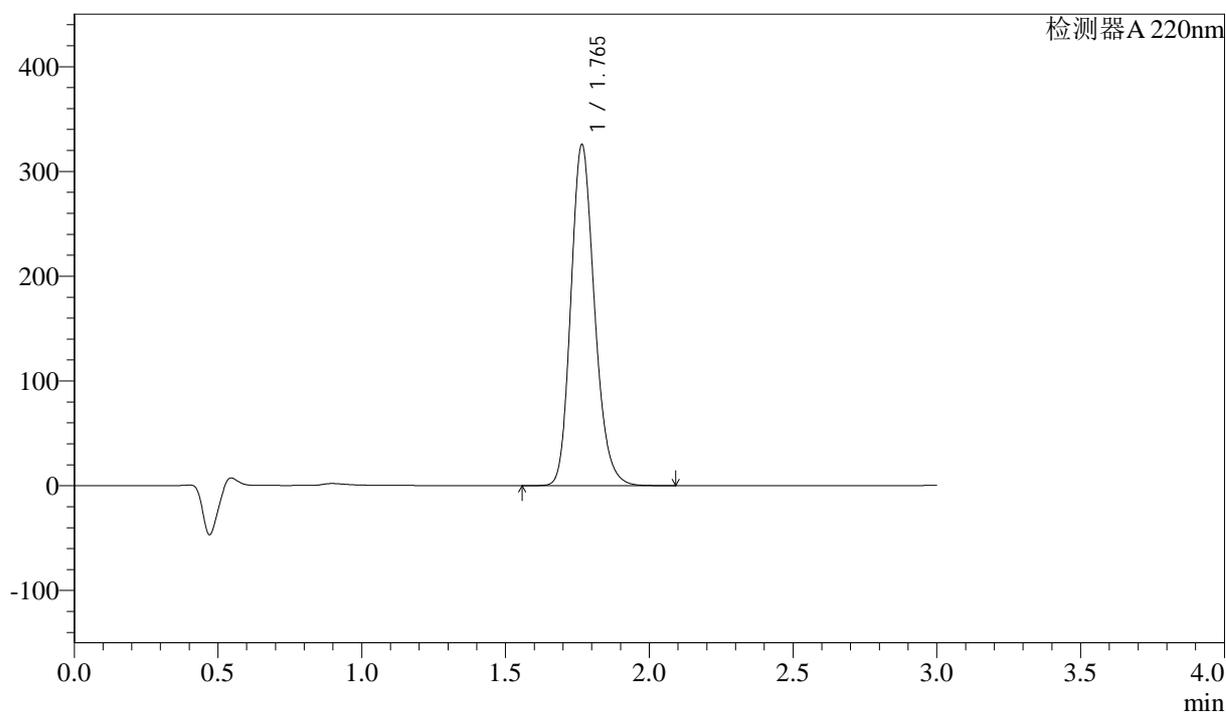

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1861741 | 325087 | 100.000 | 2249       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1861741 | 325087 | 100.000 |            |       |          |


图74 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-75-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 16:08:19 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:00 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

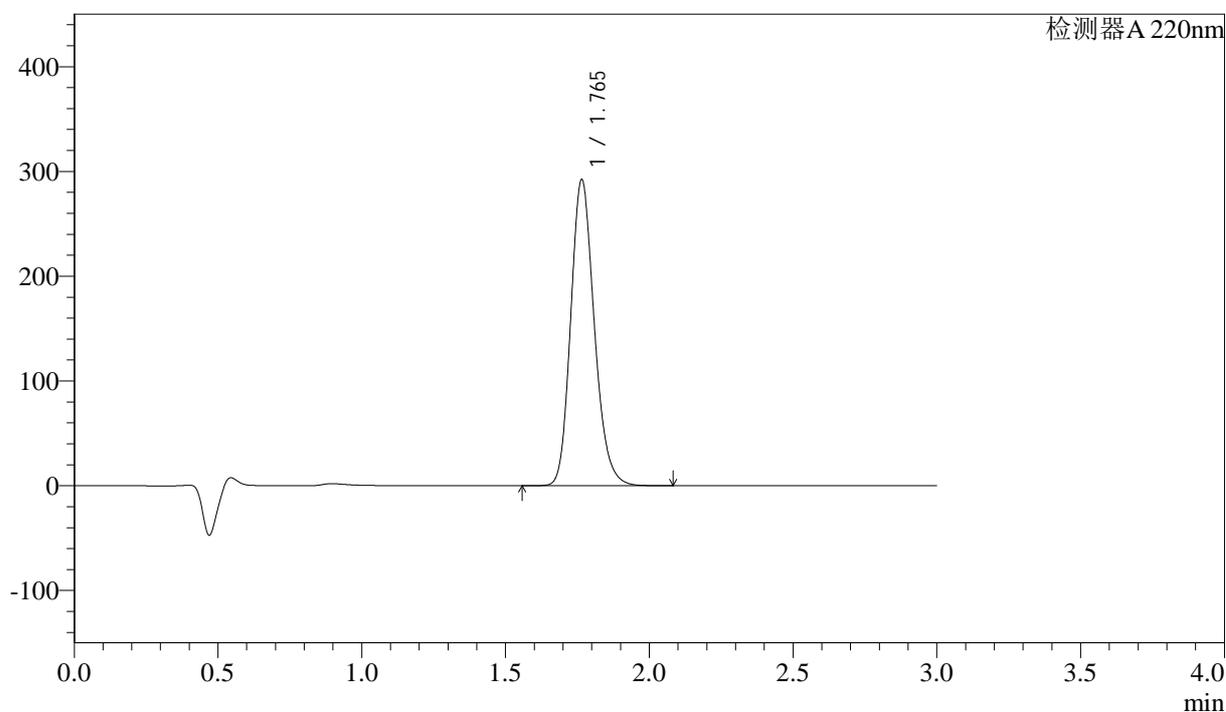

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1666259 | 291997 | 100.000 | 2259       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1666259 | 291997 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-76-2 - zzp-24061901p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 16:11:43 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:03 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

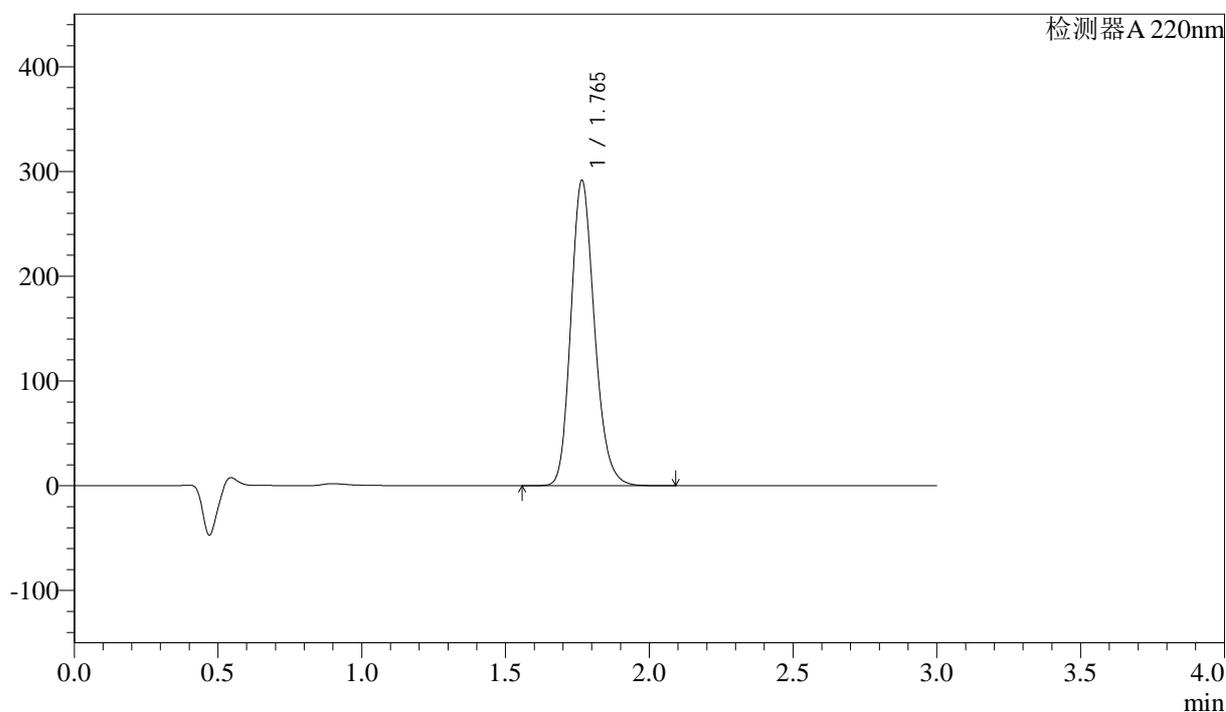

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1662340 | 291036 | 100.000 | 2261       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1662340 | 291036 | 100.000 |            |       |          |


图76 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061901批(60mg规格)-水介质-浆法-50转  
 对照品溶液-2-2

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-77-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-9  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 16:15:06 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:05 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

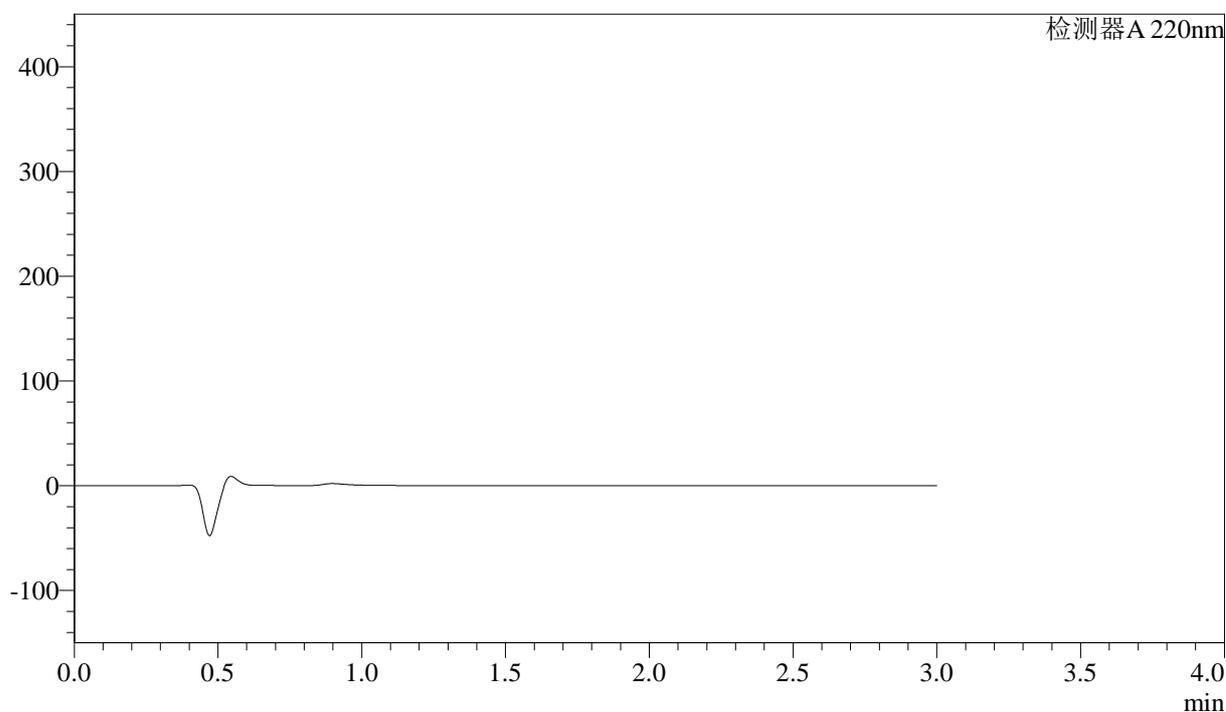

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 高度 | 面积% | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|----|-----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |    |     |            |      |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-78-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 16:18:29 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:07 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

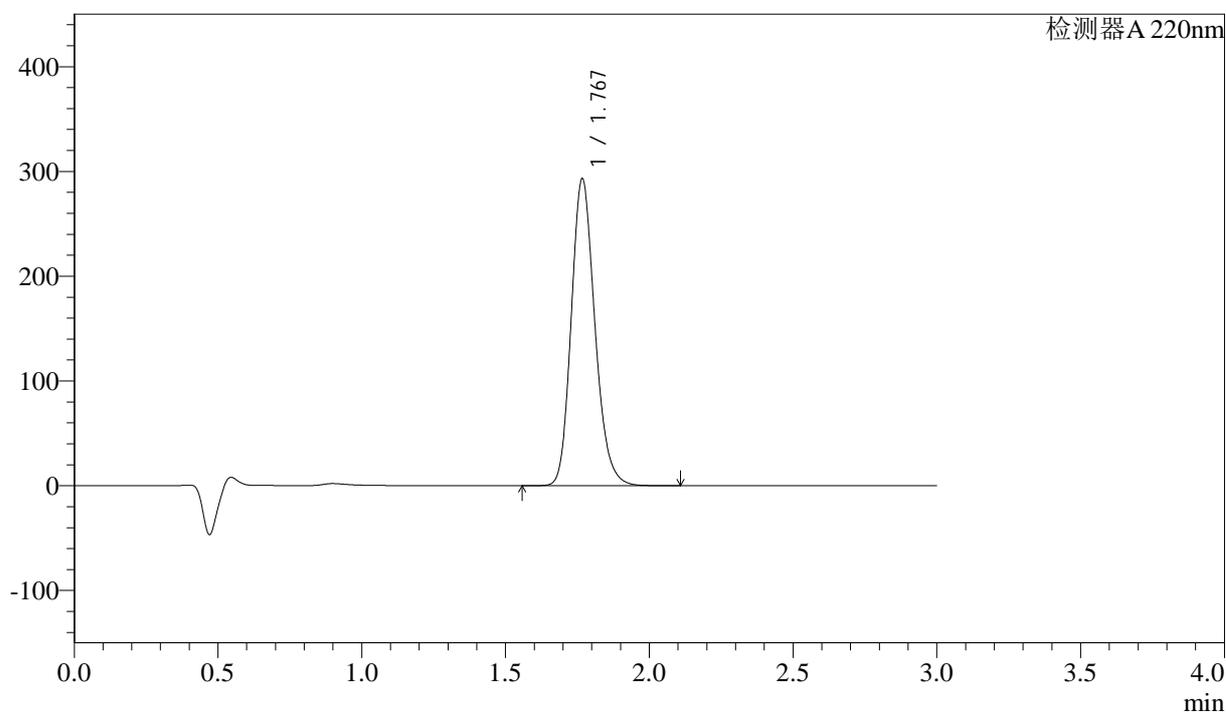

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1674284 | 291830 | 100.000 | 2256       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1674284 | 291830 | 100.000 |            |       |          |


图78 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-79-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 16:21:51 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:10 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

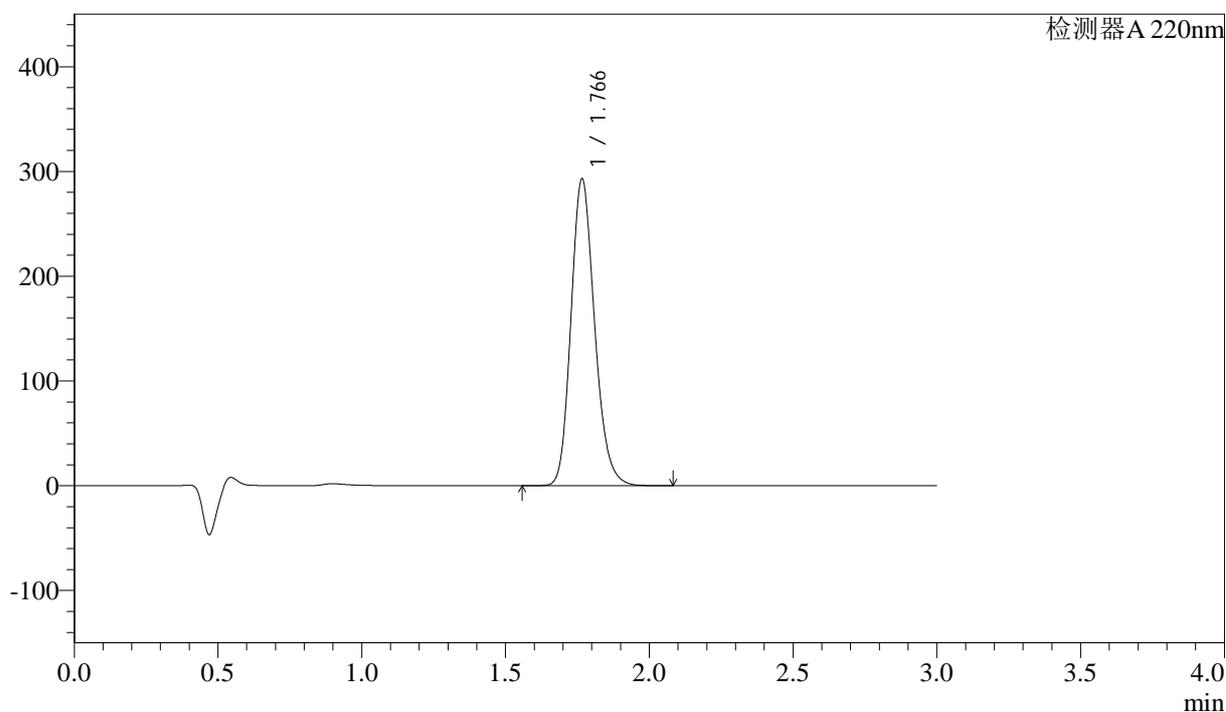

## &lt;峰表&gt;

检测器 A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1673926 | 292319 | 100.000 | 2252       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 1673926 | 292319 | 100.000 |            |       |          |


图79 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-2

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-80-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 16:25:13 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:13 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

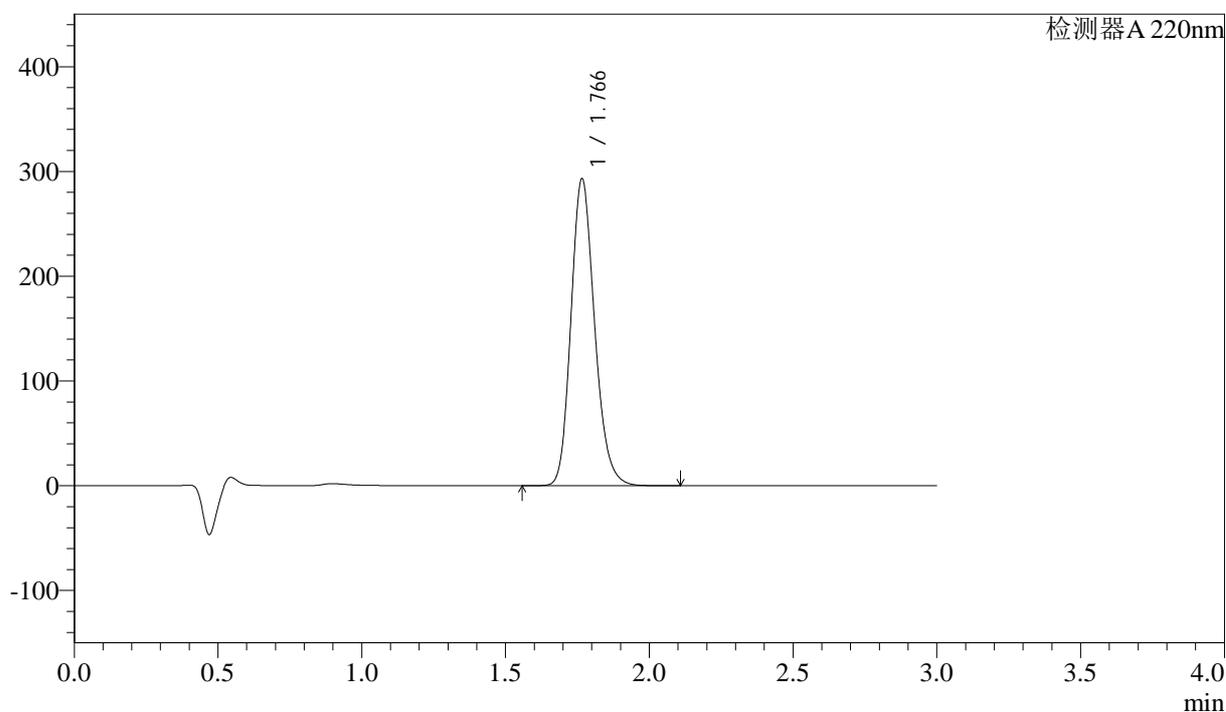

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1674642 | 292484 | 100.000 | 2253       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1674642 | 292484 | 100.000 |            |       |          |


图80 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-3

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-81-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 16:28:35 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:15 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

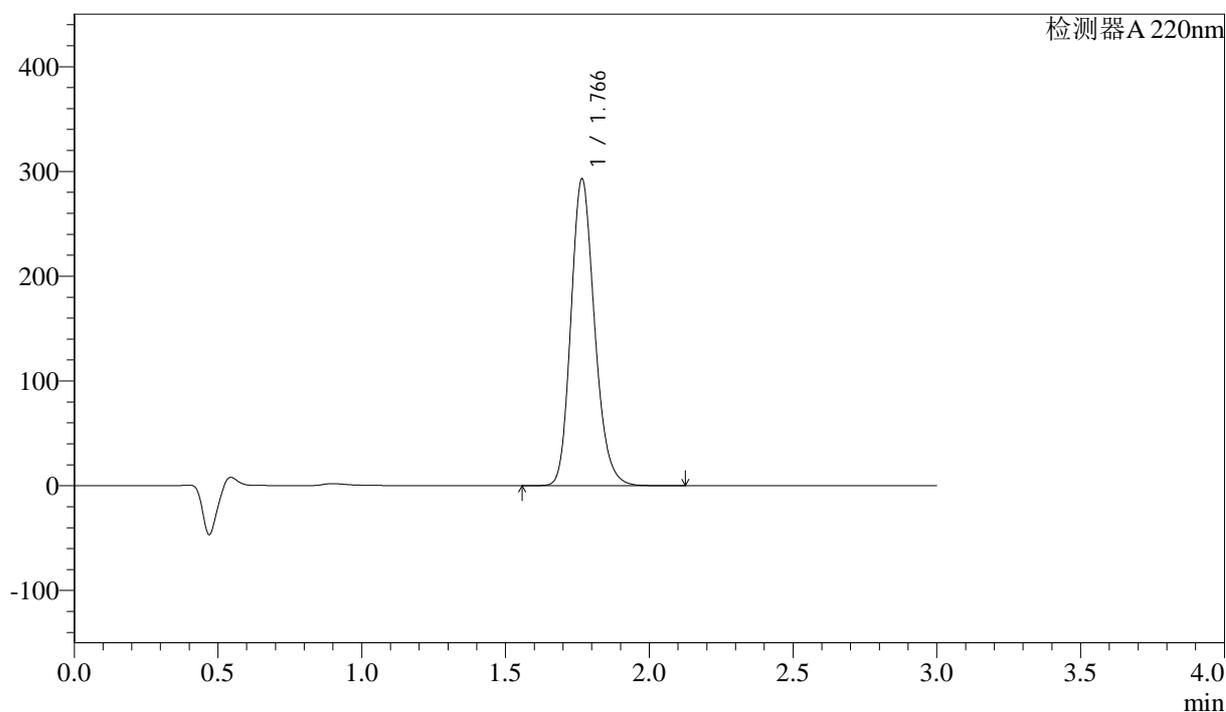

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1675016 | 292381 | 100.000 | 2250       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1675016 | 292381 | 100.000 |            |       |          |


图81 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-82-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 16:31:59 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:18 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

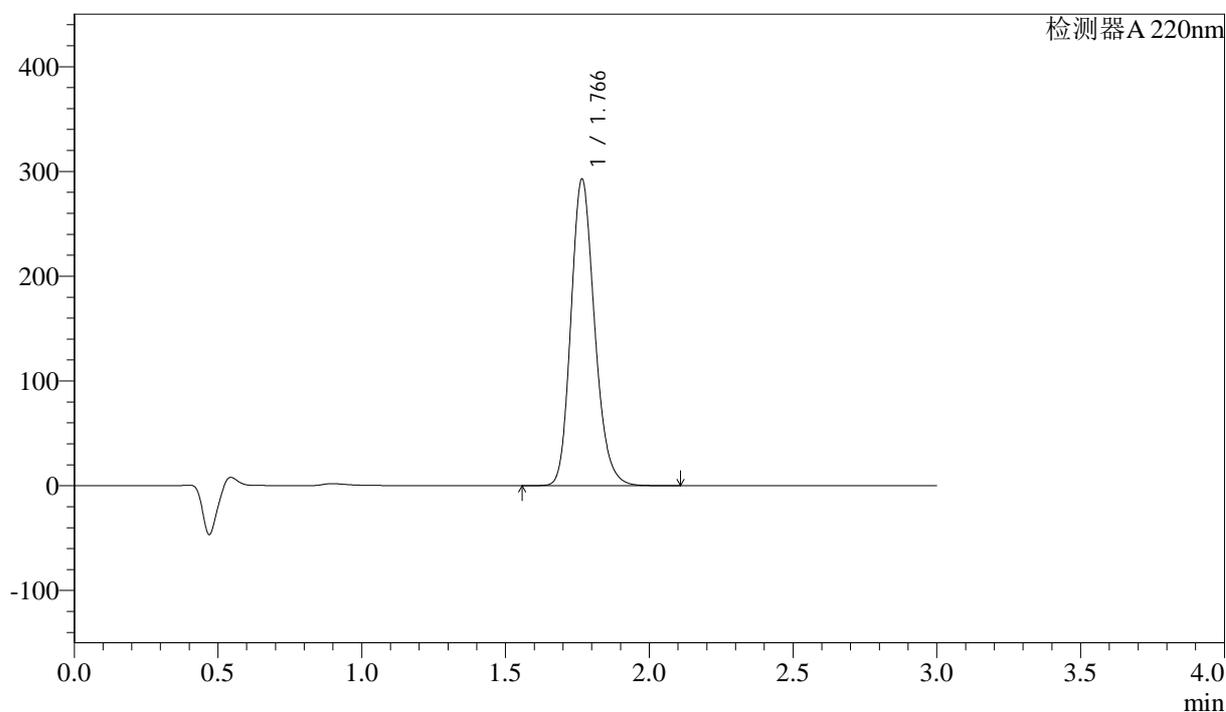

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1674724 | 292132 | 100.000 | 2247       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1674724 | 292132 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-83-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 16:35:21 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:20 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

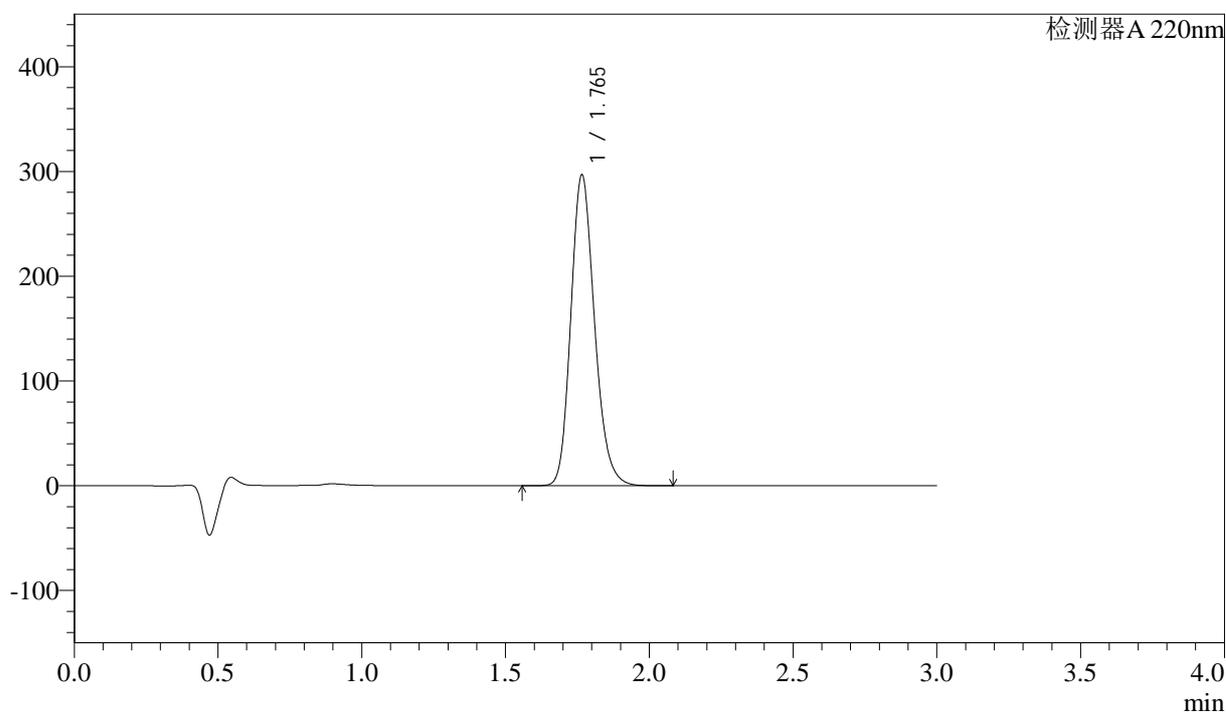

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1699222 | 296297 | 100.000 | 2242       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1699222 | 296297 | 100.000 |            |       |          |


图83 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-84-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 16:38:44 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:56:23 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

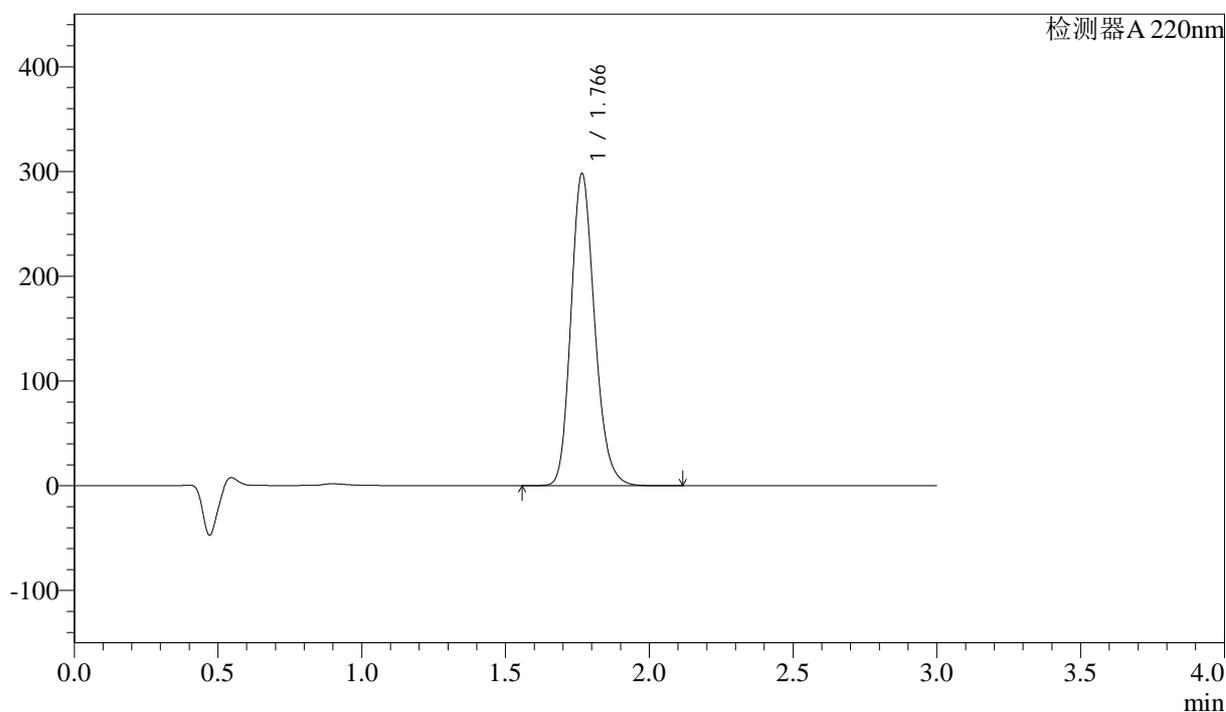

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1705810 | 297333 | 100.000 | 2245       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1705810 | 297333 | 100.000 |            |       |          |


图84 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-85-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 16:42:06 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:56:25 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

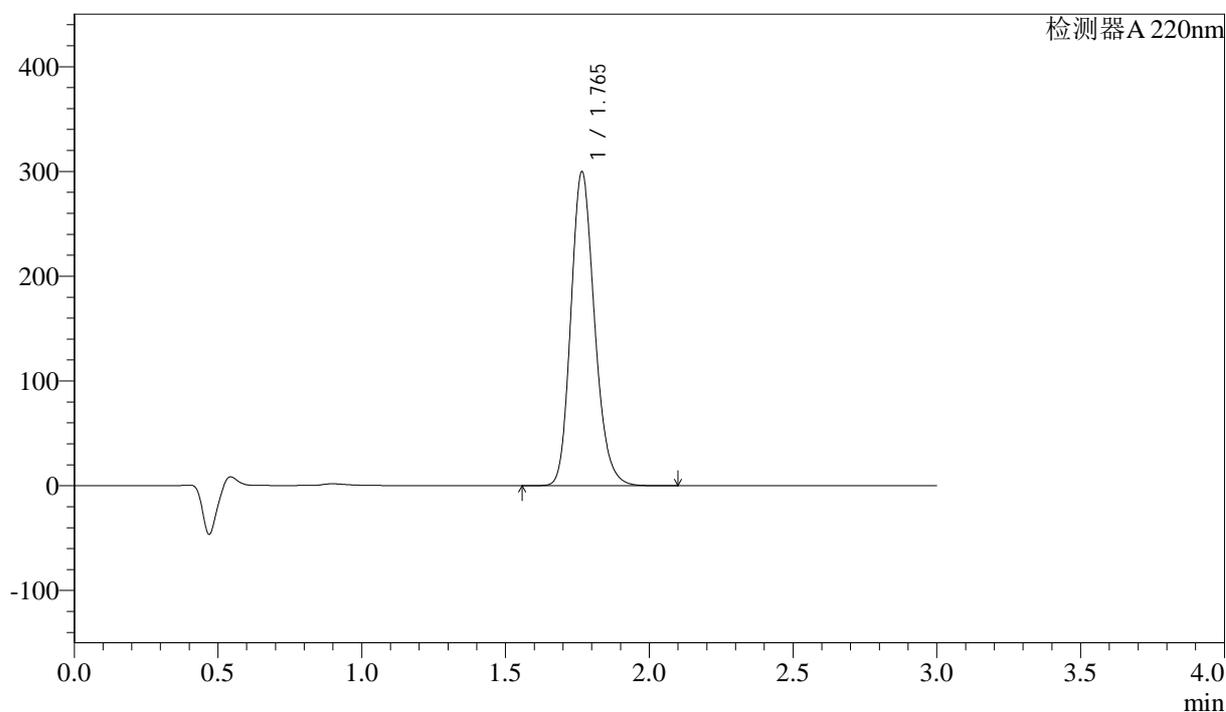

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1714837 | 299235 | 100.000 | 2246       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1714837 | 299235 | 100.000 |            |       |          |


图85 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-86-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 16:45:30 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:28 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

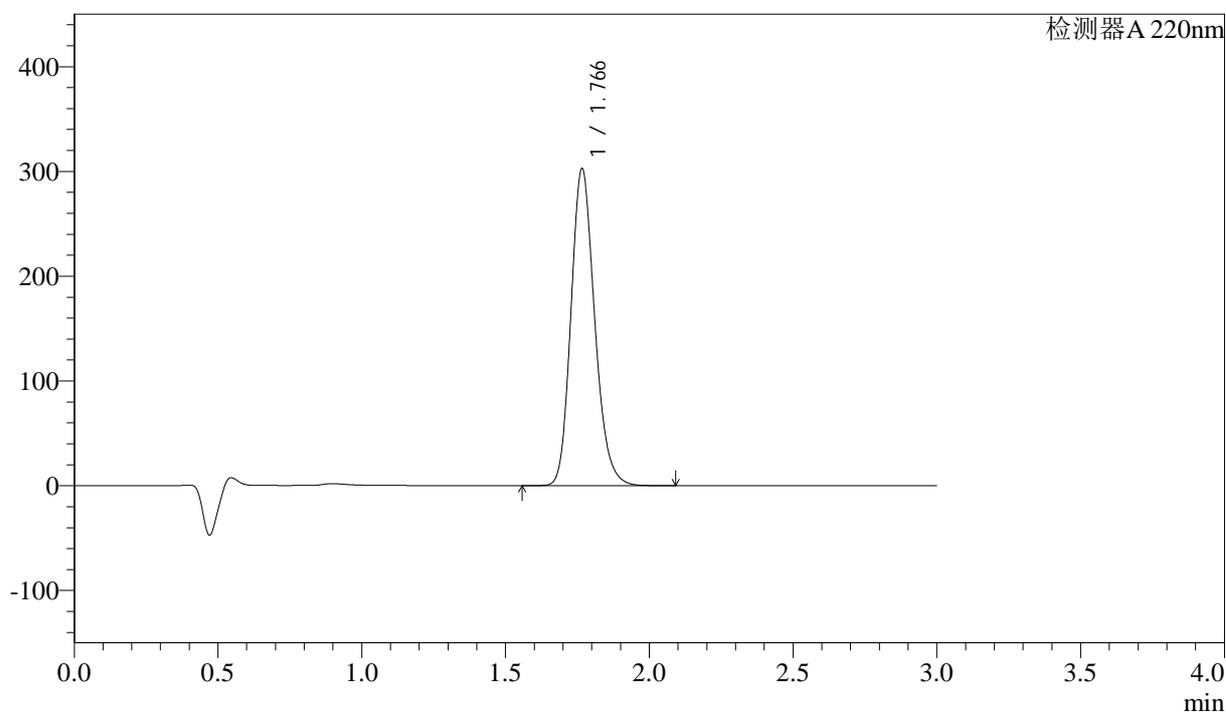

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1734817 | 302050 | 100.000 | 2240       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1734817 | 302050 | 100.000 |            |       |          |


图86 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-87-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P5.lcb  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 16:48:53 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:30 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

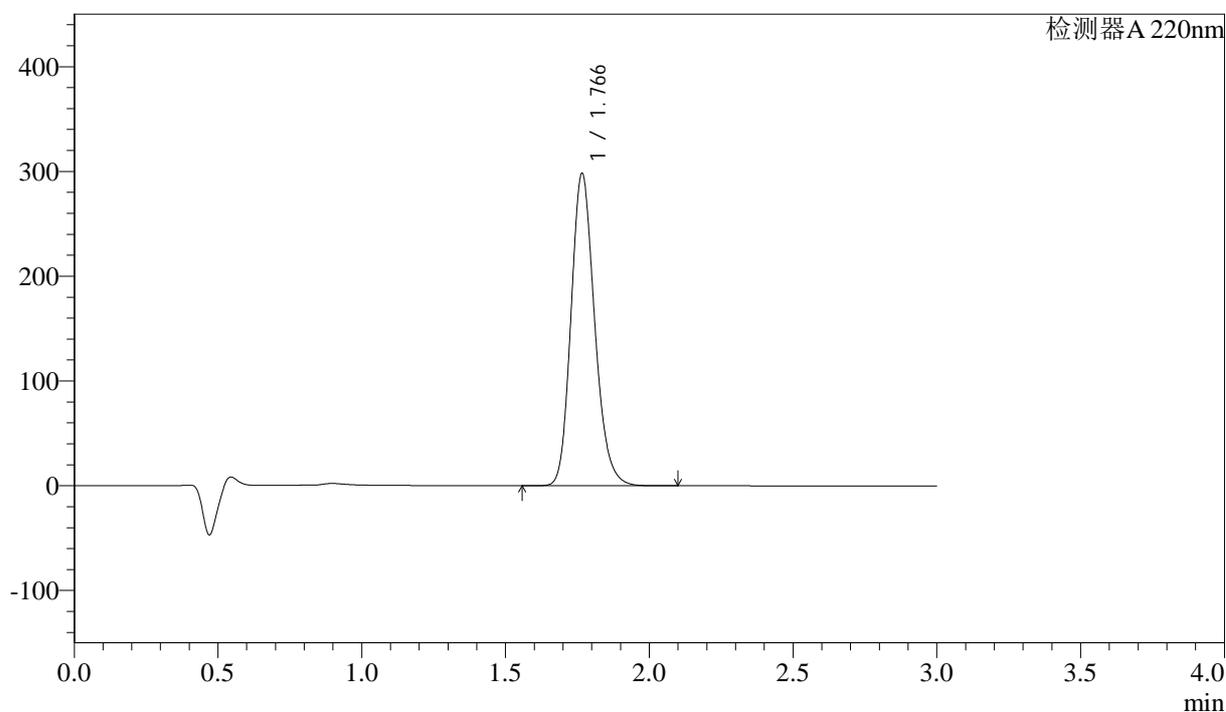

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1704679 | 297437 | 100.000 | 2250       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1704679 | 297437 | 100.000 |            |       |          |


图87 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-88-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 16:52:15      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/01 08:56:33 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV

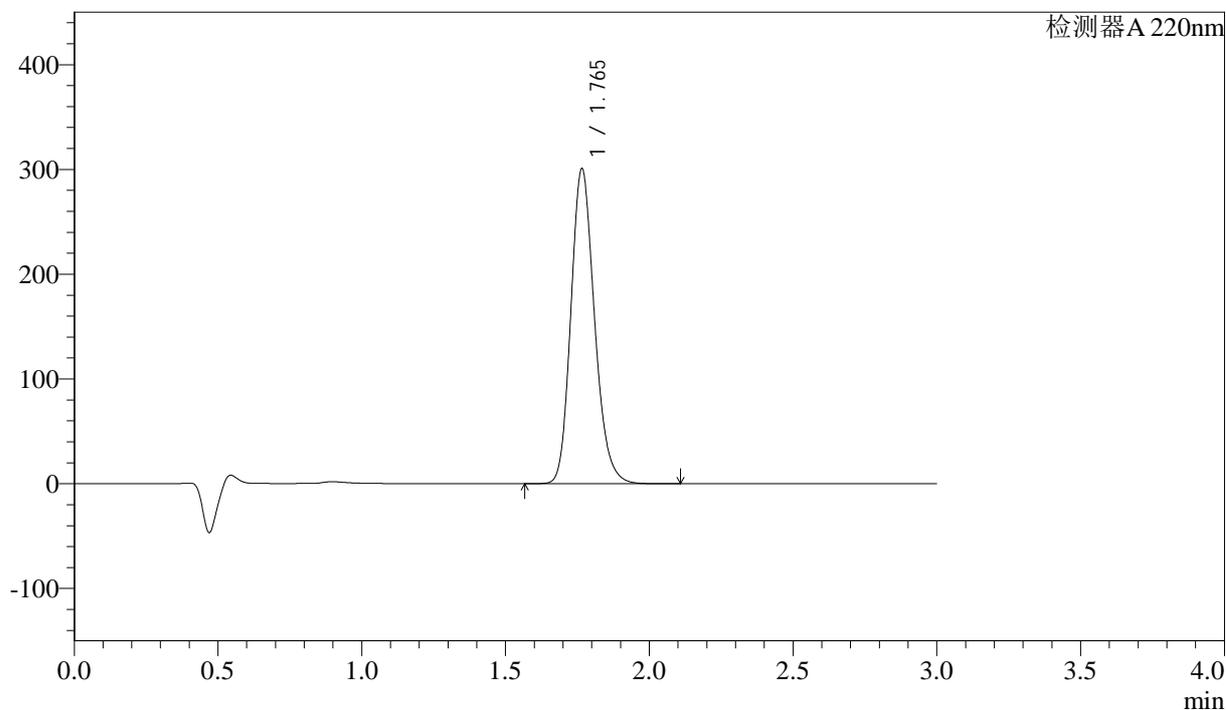

<峰表>

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.765 | 1717546 | 300284 | 100.000 | 2254       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 1717546 | 300284 | 100.000 |            |       |          |


图88 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-89-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 16:55:38 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:36 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

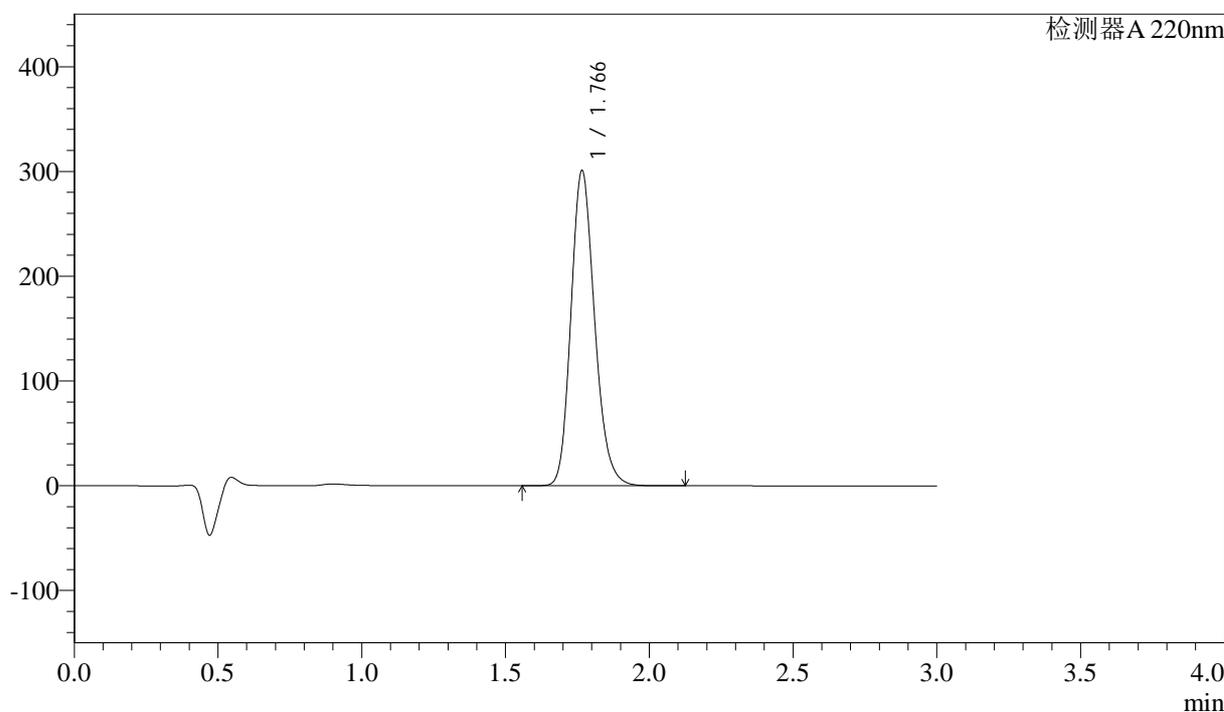

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1723439 | 300207 | 100.000 | 2242       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1723439 | 300207 | 100.000 |            |       |          |


图89 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-90-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-11  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 16:59:00 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:38 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

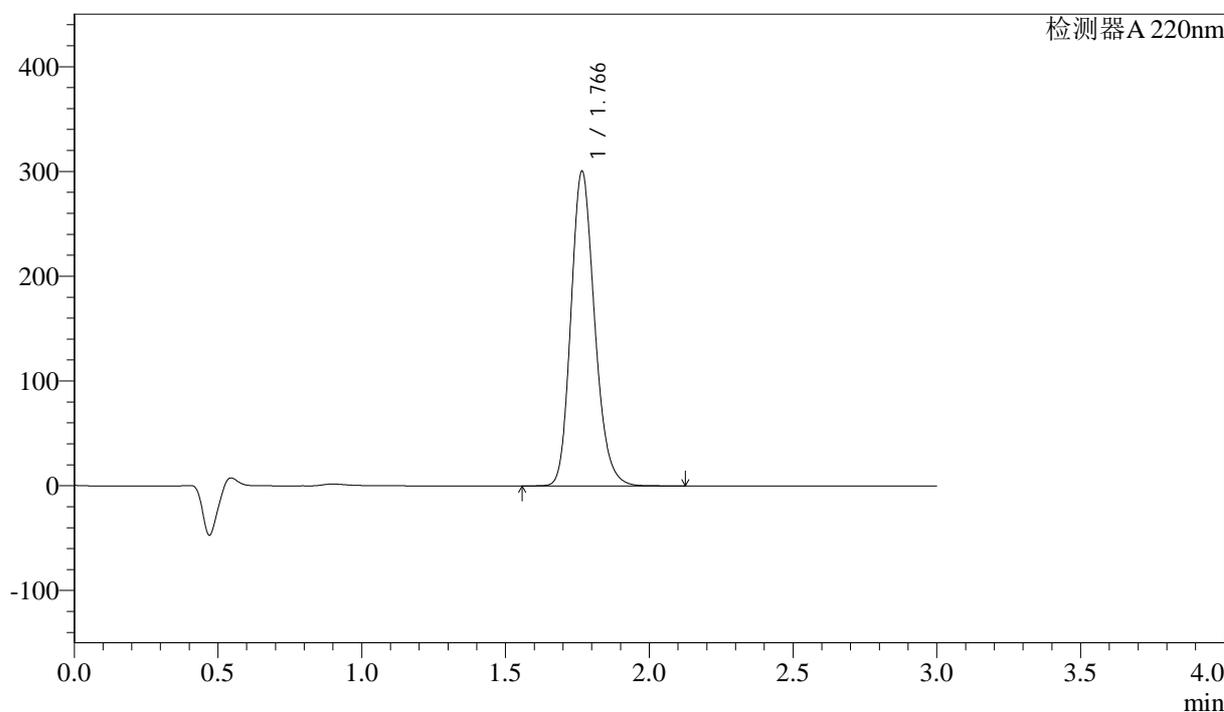

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1721159 | 299800 | 100.000 | 2241       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1721159 | 299800 | 100.000 |            |       |          |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-91-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-20  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 17:02:22      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/01 08:56:41 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV

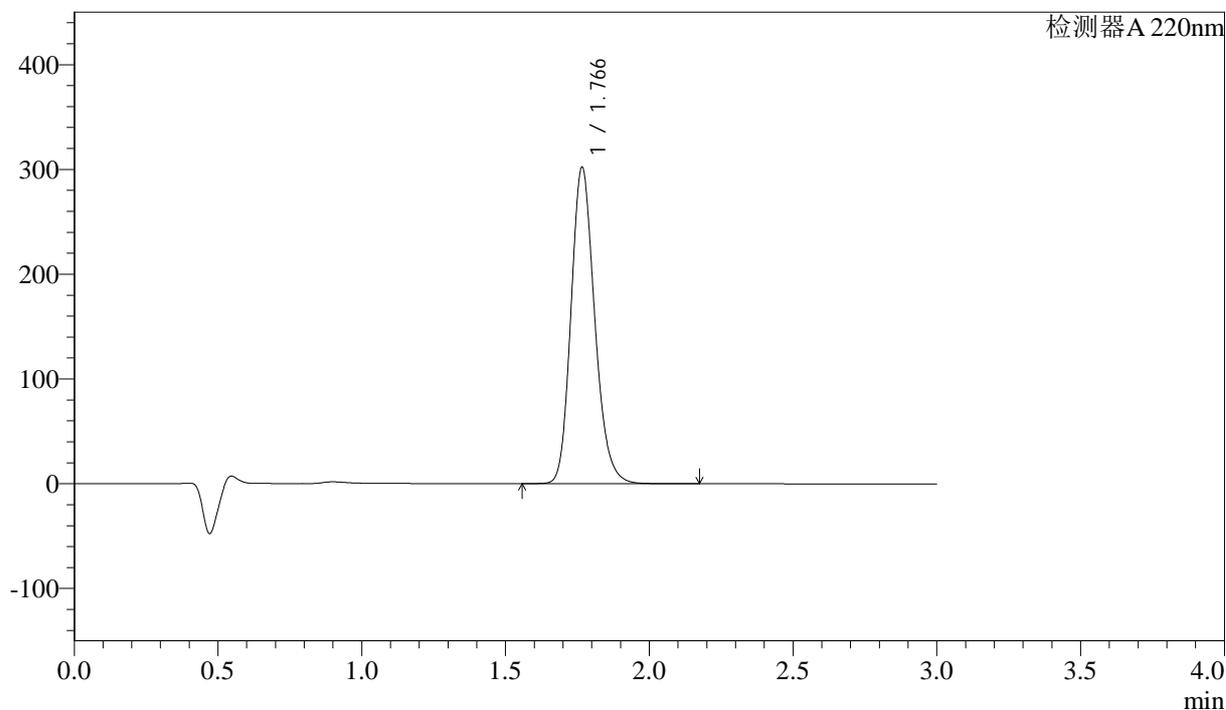

<峰表>

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1730591 | 301299 | 100.000 | 2242       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1730591 | 301299 | 100.000 |            |       |          |


图91 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-92-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-29  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 17:05:45 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:43 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

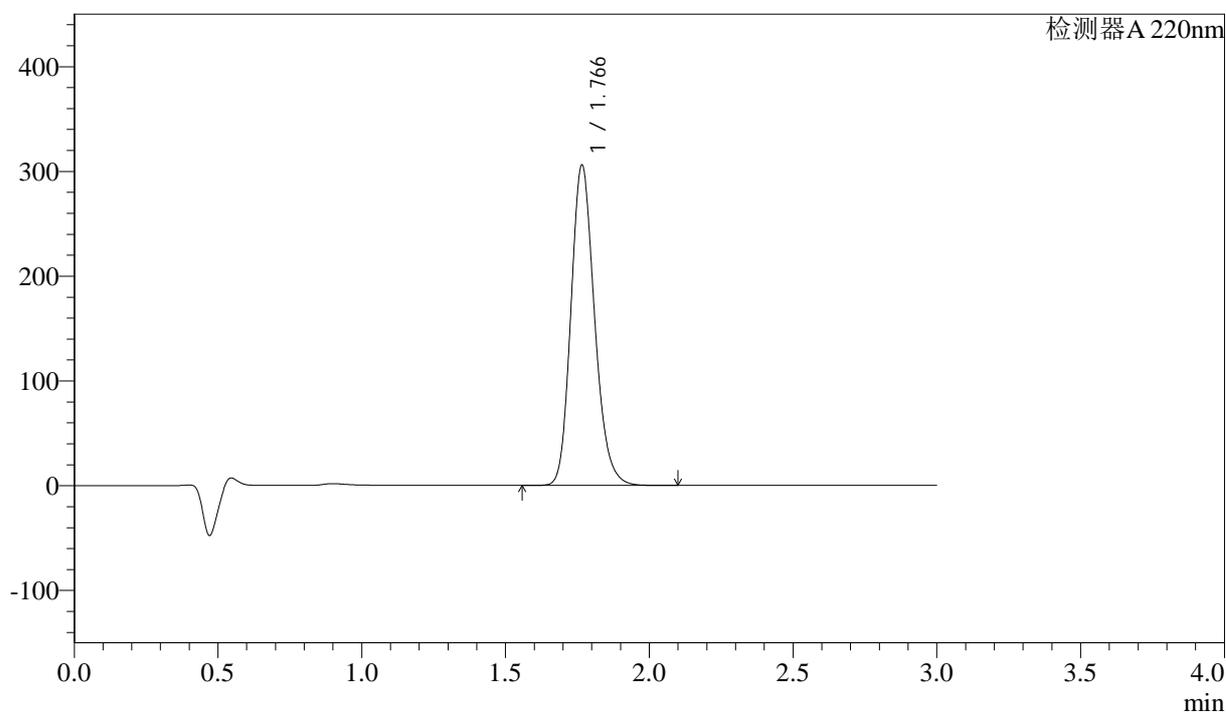

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1750442 | 305309 | 100.000 | 2245       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1750442 | 305309 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-93-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 17:09:07 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:46 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

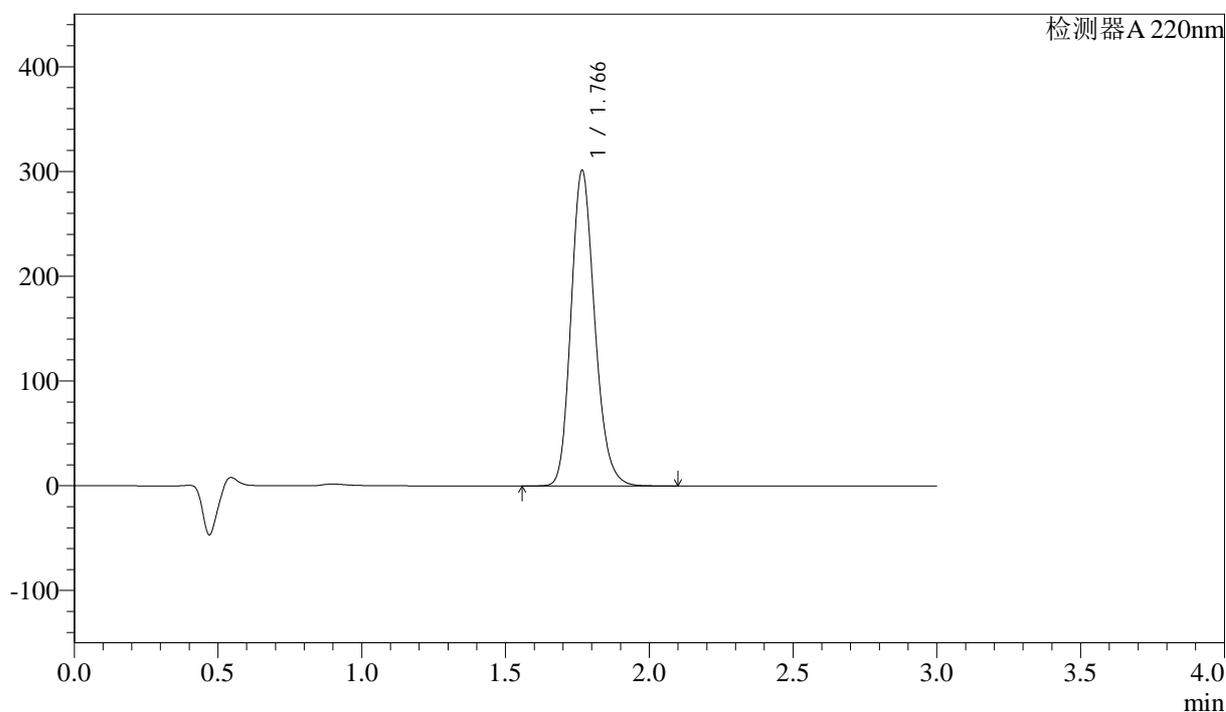

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1726071 | 300428 | 100.000 | 2240       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1726071 | 300428 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-94-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 17:12:30 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:48 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

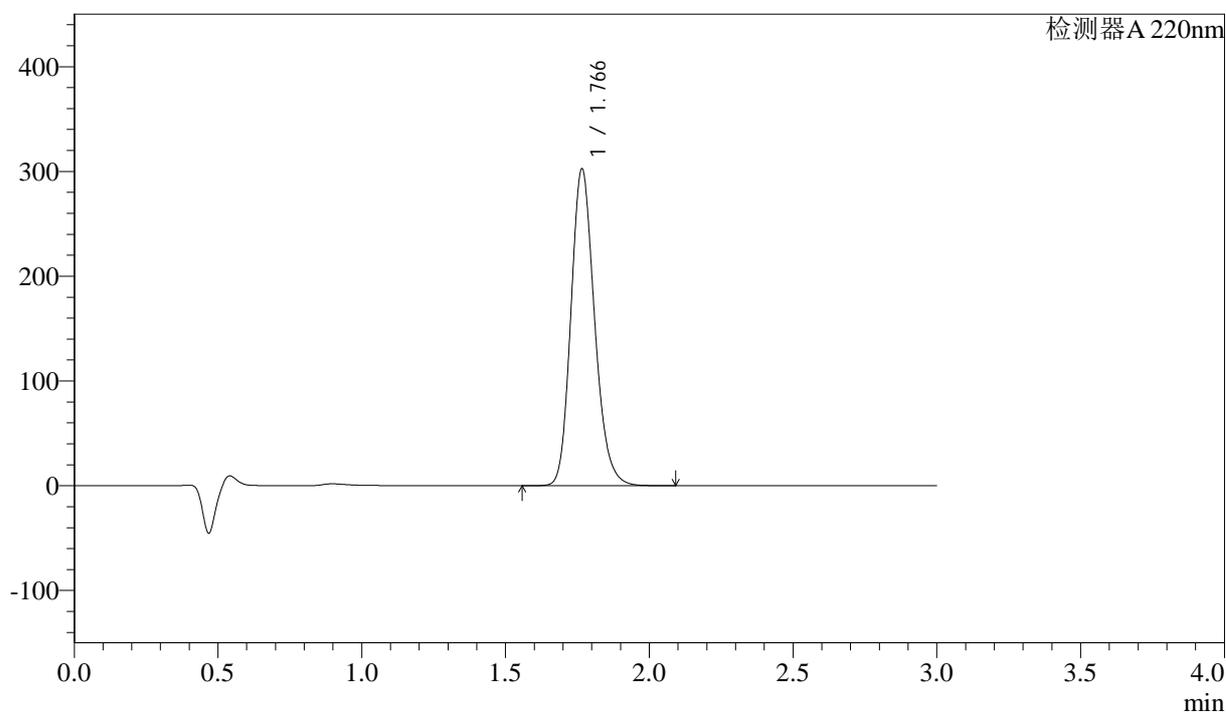

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1729380 | 301902 | 100.000 | 2249       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1729380 | 301902 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-95-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-3  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 17:15:52 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:51 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

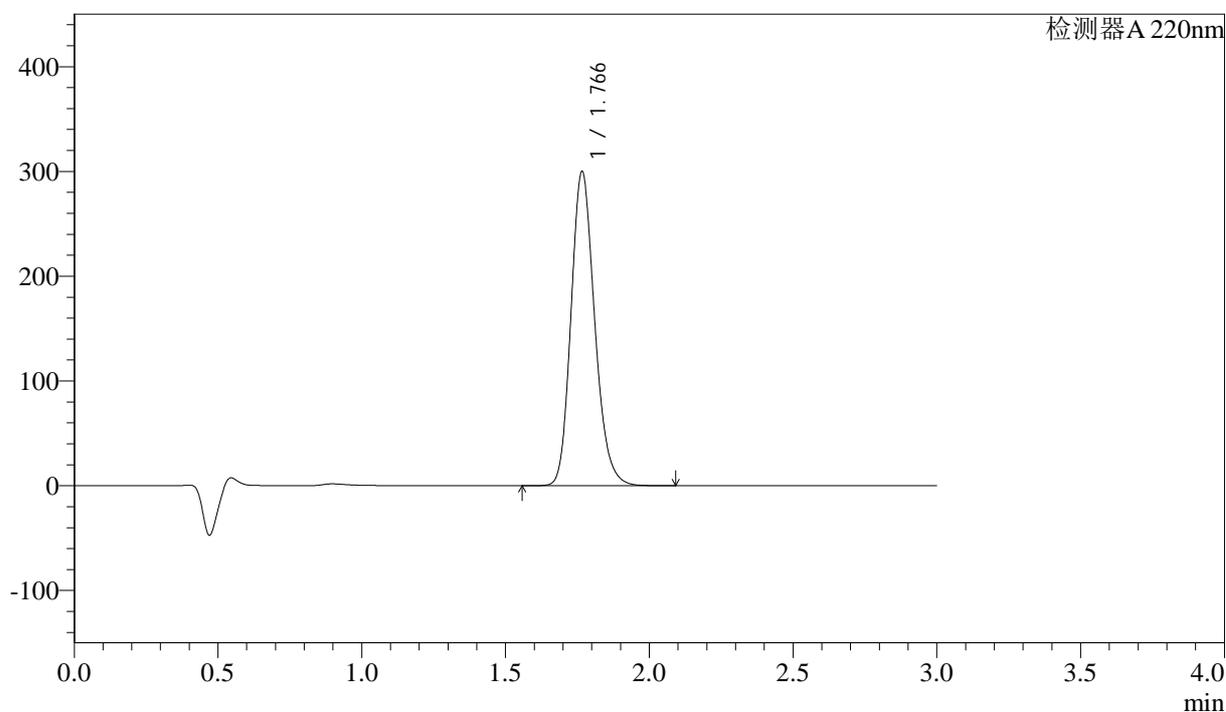

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1715991 | 299236 | 100.000 | 2247       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1715991 | 299236 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-96-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-12  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 17:19:14 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:53 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

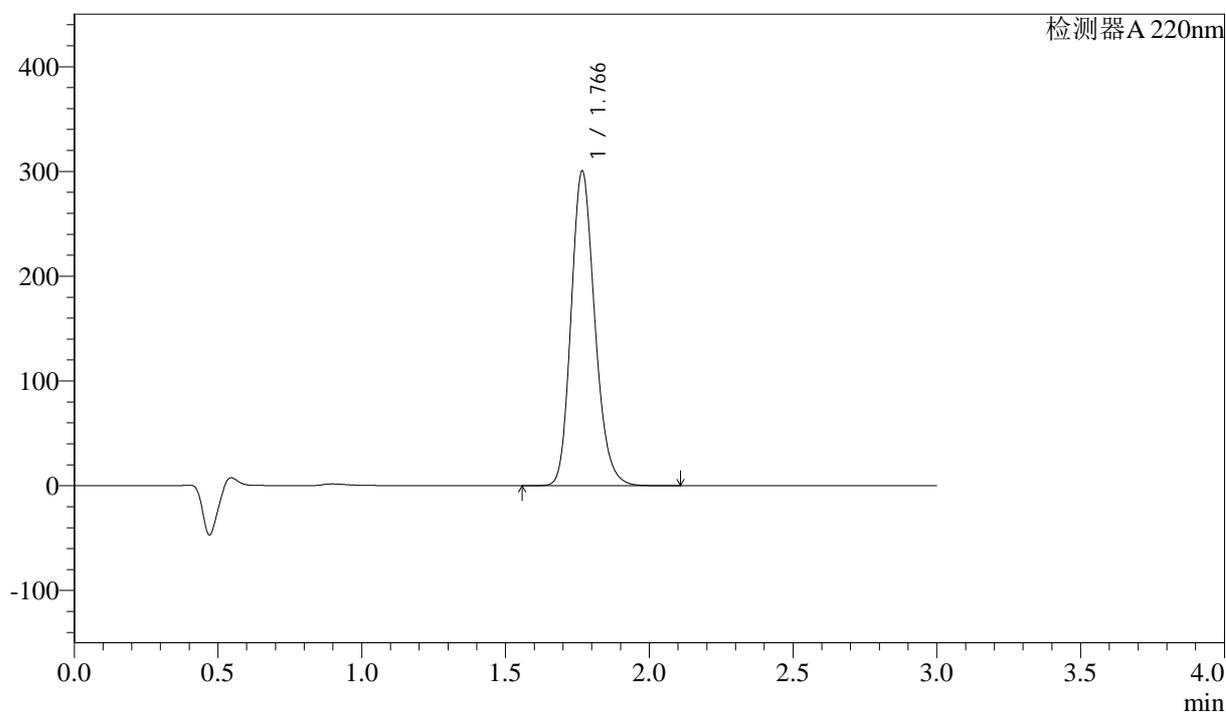

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1722078 | 299476 | 100.000 | 2240       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1722078 | 299476 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-97-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-21  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 17:22:37 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:56 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

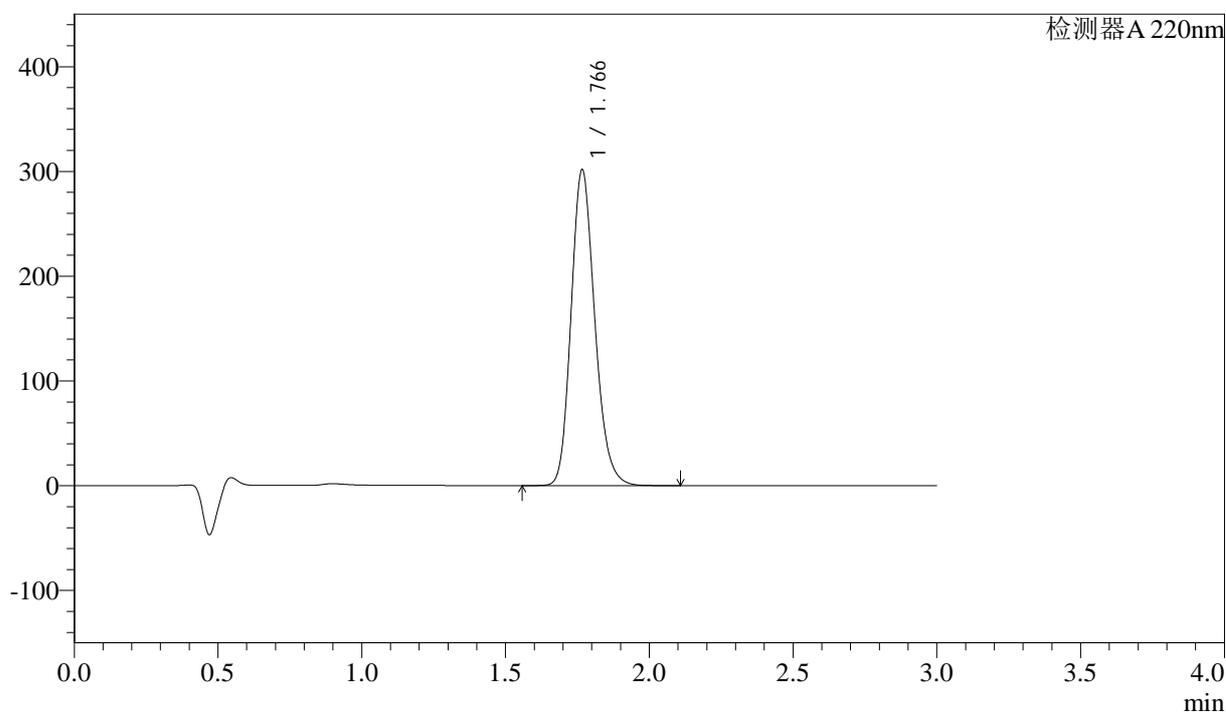

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1727339 | 300549 | 100.000 | 2241       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1727339 | 300549 | 100.000 |            |       |          |


图97 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-98-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-30  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 17:25:59 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:56:59 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

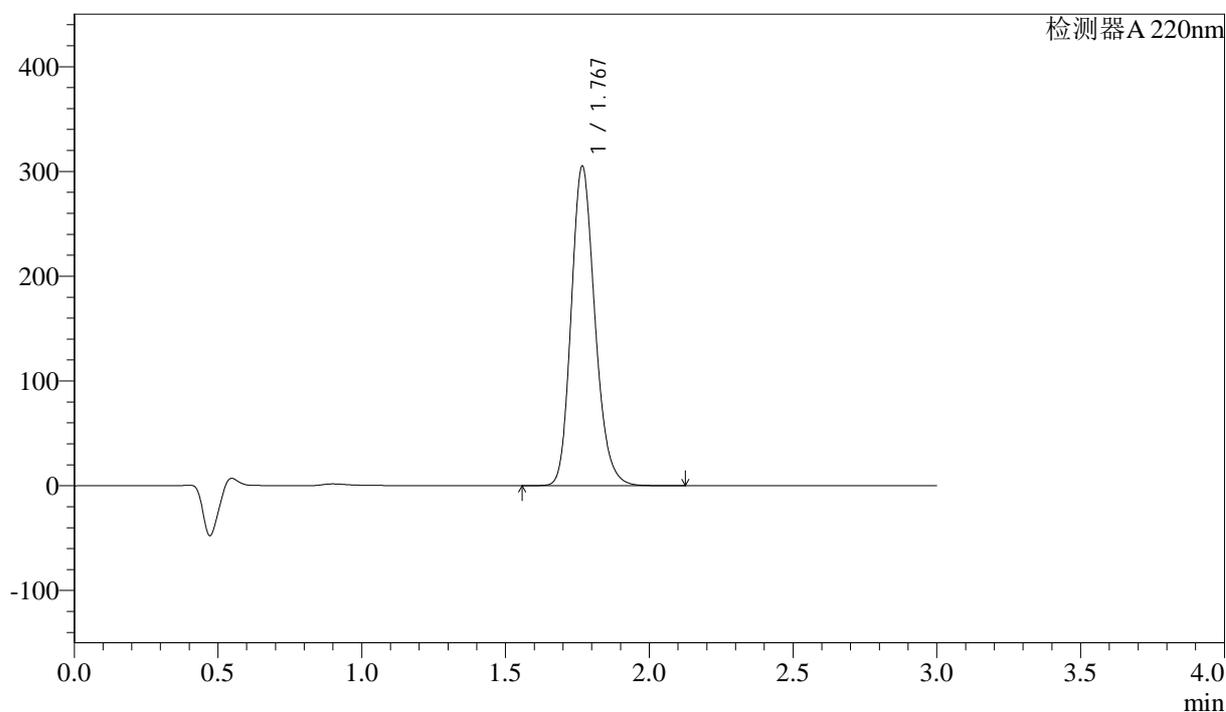

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1747991 | 303751 | 100.000 | 2242       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1747991 | 303751 | 100.000 |            |       |          |


图98 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-99-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-39  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 17:29:21 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:57:02 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

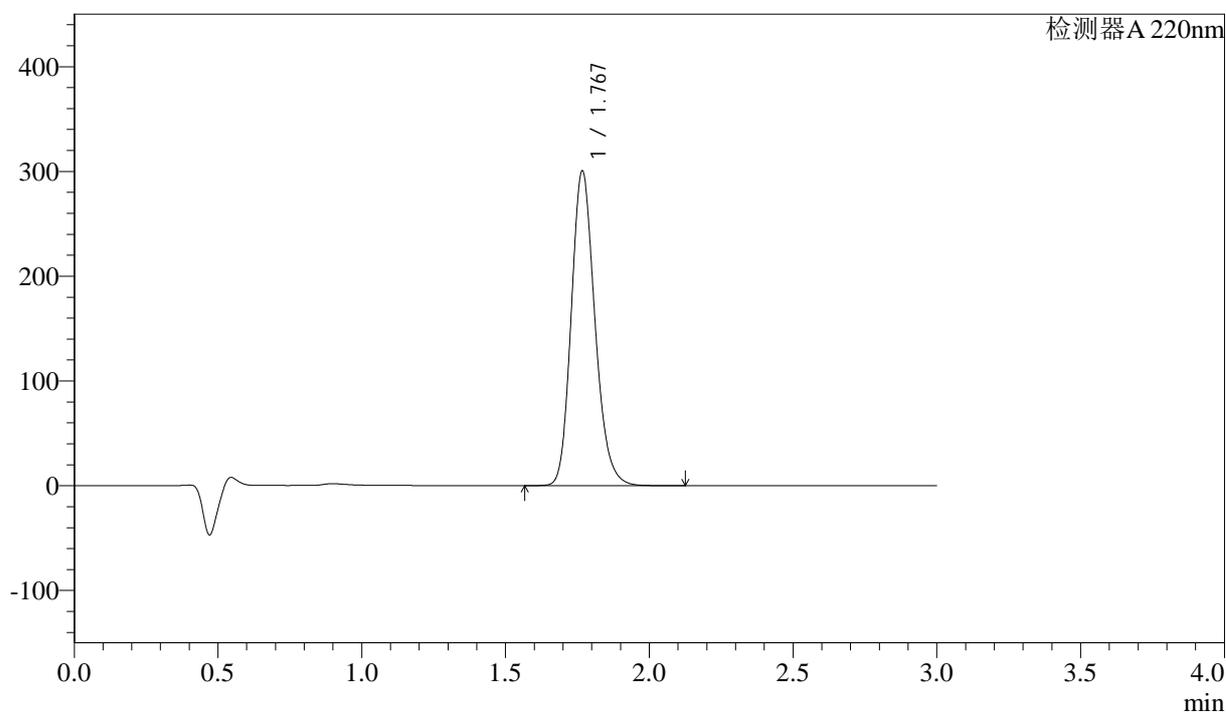

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1718590 | 299245 | 100.000 | 2252       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1718590 | 299245 | 100.000 |            |       |          |


图99 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-100-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-48  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 17:32:44      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/01 08:57:04 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV

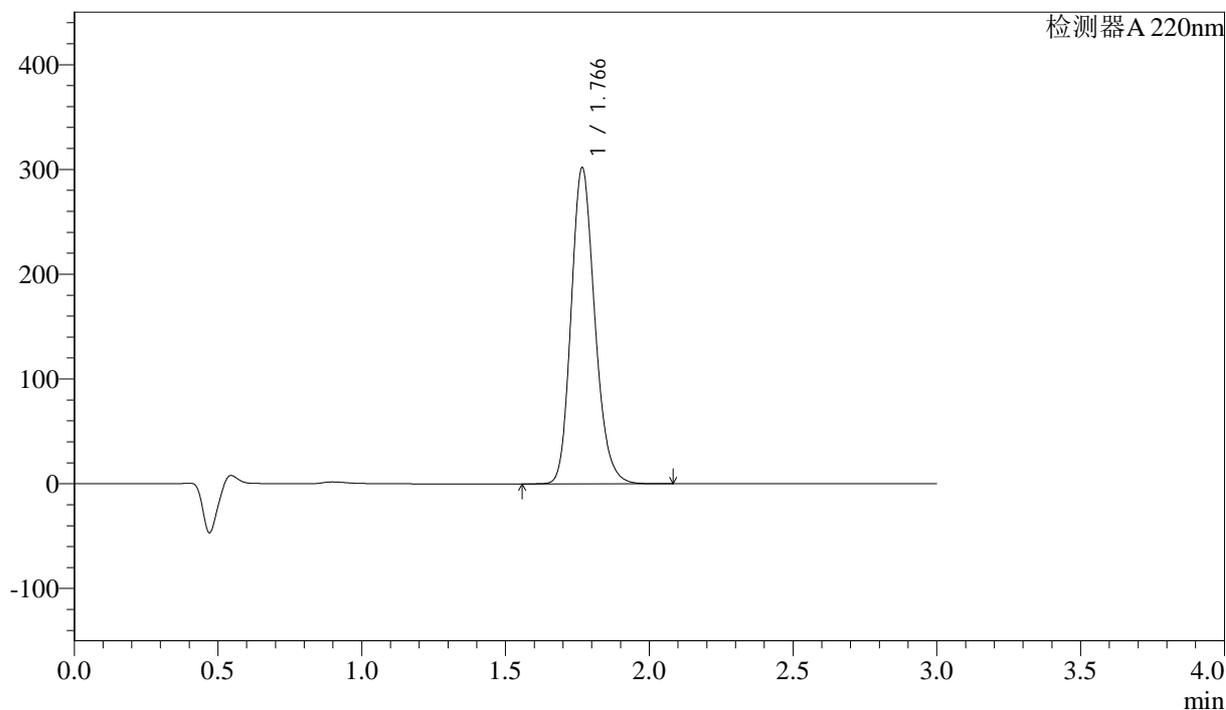

<峰表>

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1727057 | 300811 | 100.000 | 2247       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1727057 | 300811 | 100.000 |            |       |          |


图100 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-101-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-4  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 17:36:07      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/01 08:57:07 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

### <色谱图>

mV

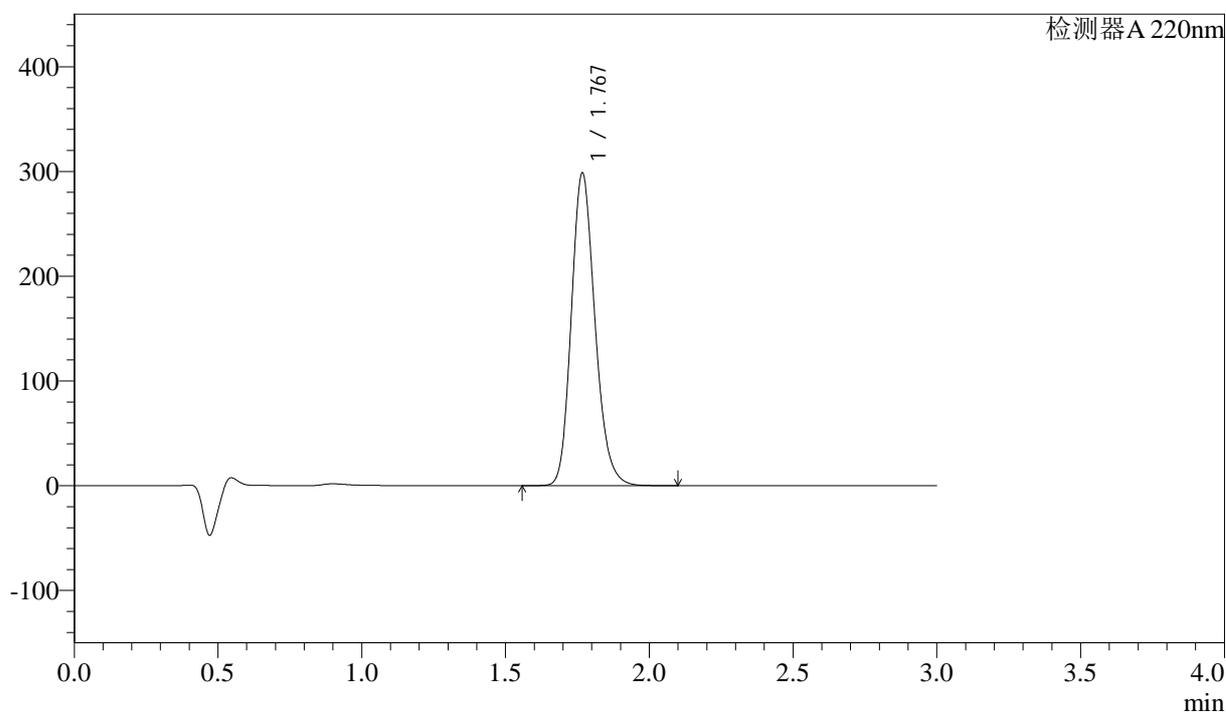

### <峰表>

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1708245 | 297005 | 100.000 | 2249       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1708245 | 297005 | 100.000 |            |       |          |


图101 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-102-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-13  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 17:39:29 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:57:09 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

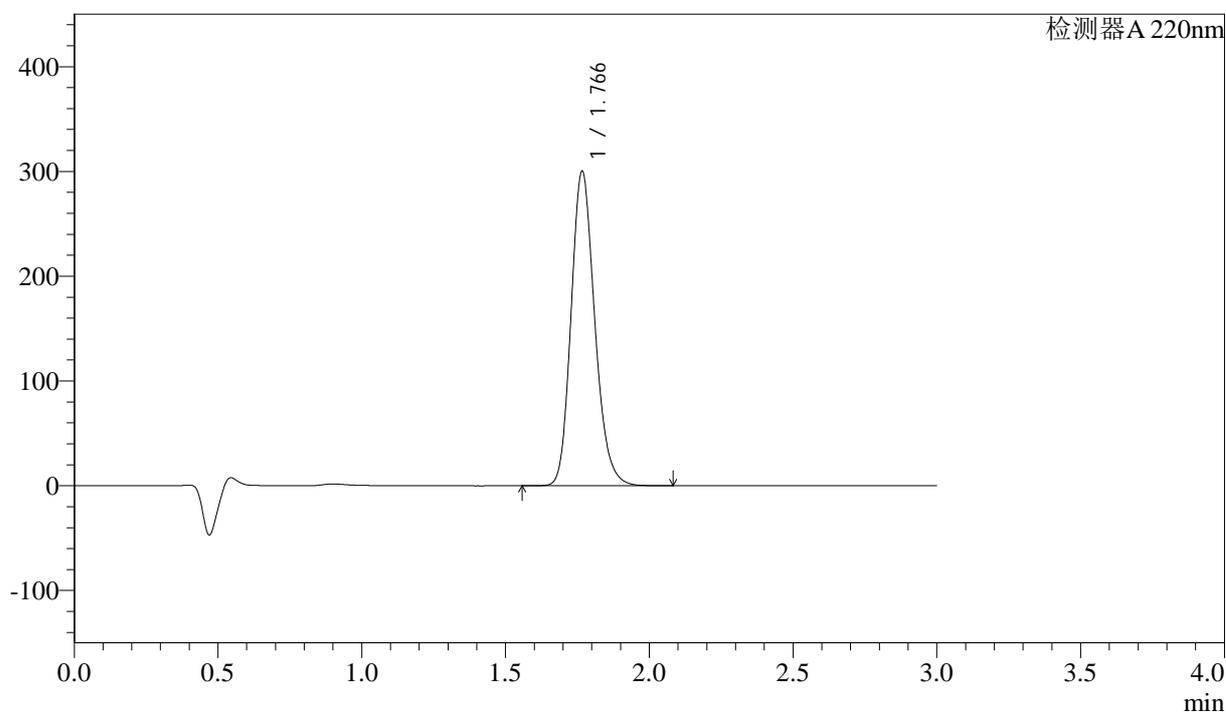

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1717692 | 299419 | 100.000 | 2250       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1717692 | 299419 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-103-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-22  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 17:42:51 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:57:12 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

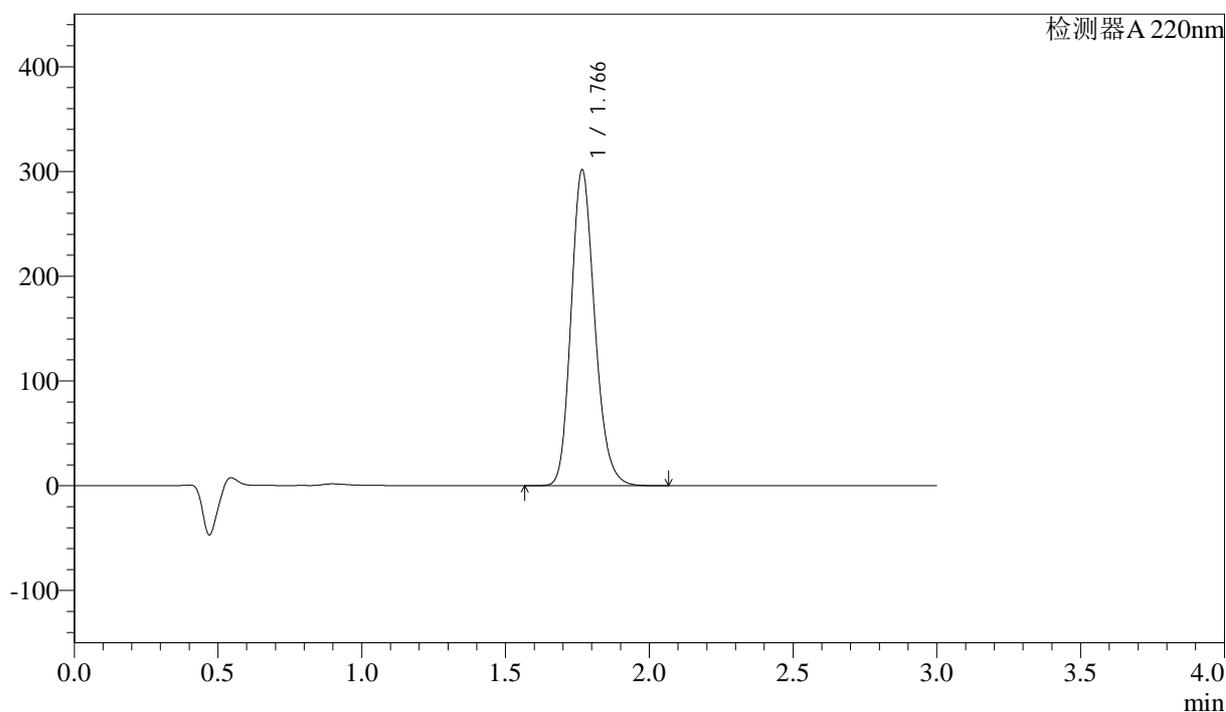

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1723753 | 300621 | 100.000 | 2250       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 1723753 | 300621 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-104-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-31  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 17:46:13 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:57:14 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

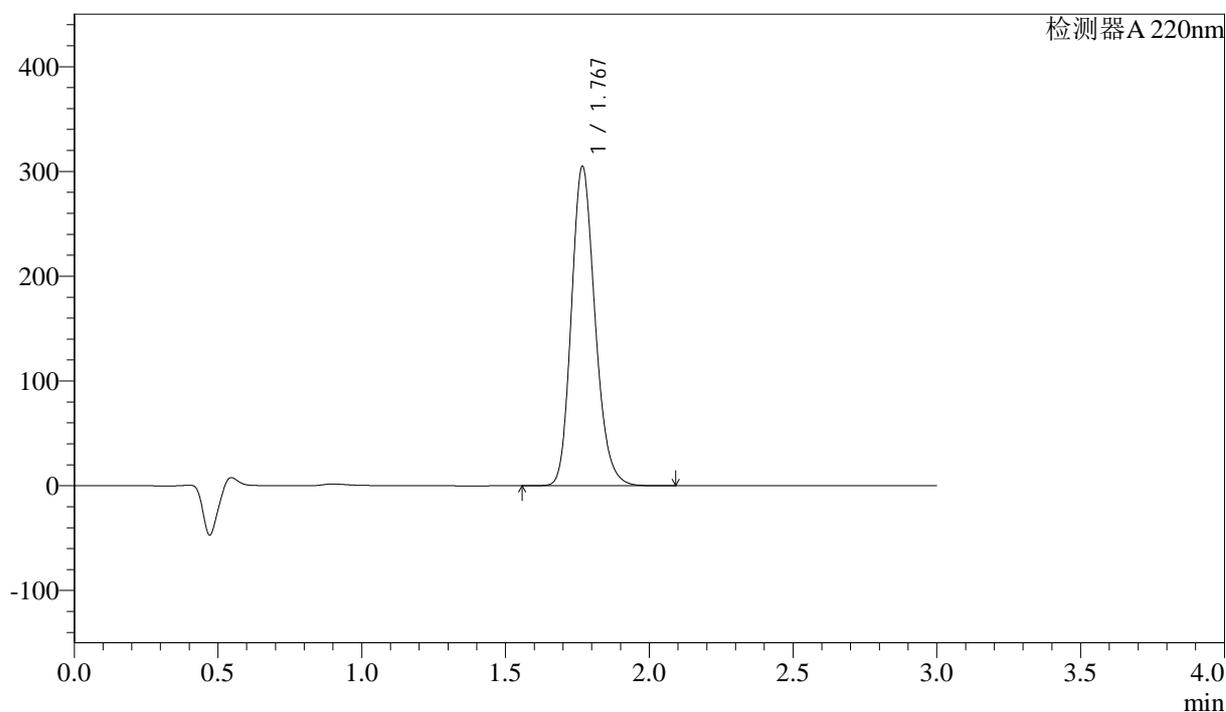

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1746227 | 303223 | 100.000 | 2246       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1746227 | 303223 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-105-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-40  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 17:49:35 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:57:17 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

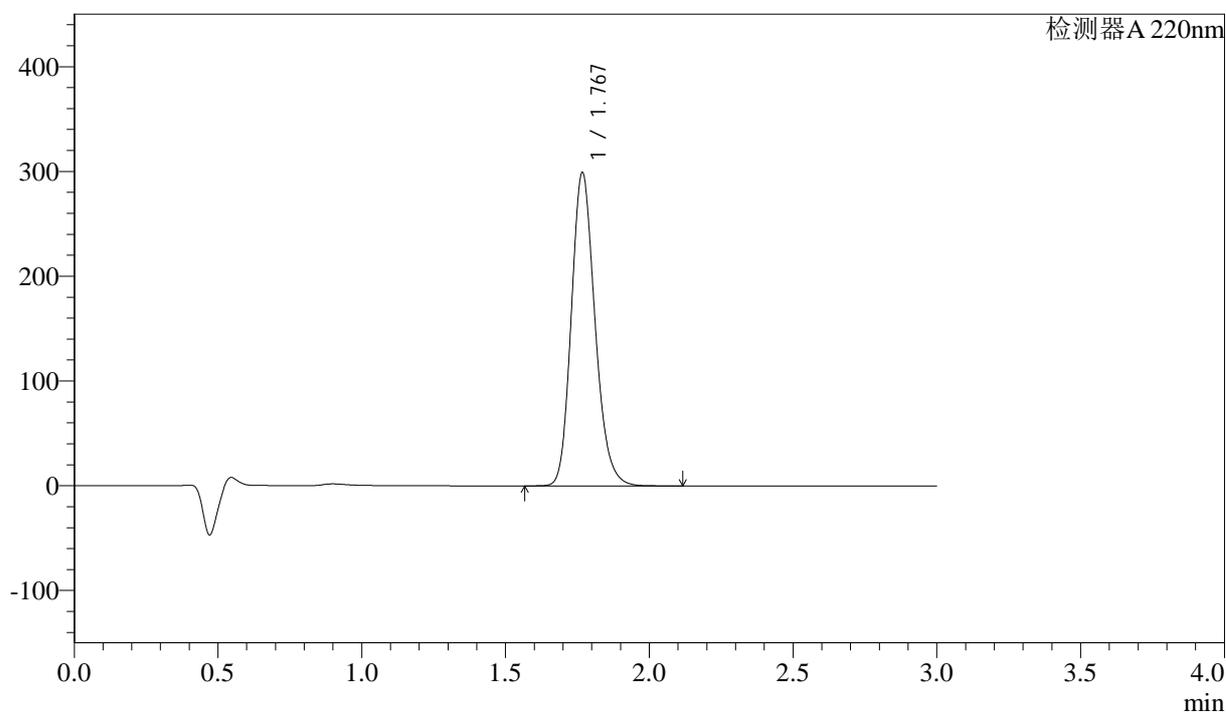

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1712964 | 297631 | 100.000 | 2246       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1712964 | 297631 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-106-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-49  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 17:52:57 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:57:19 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

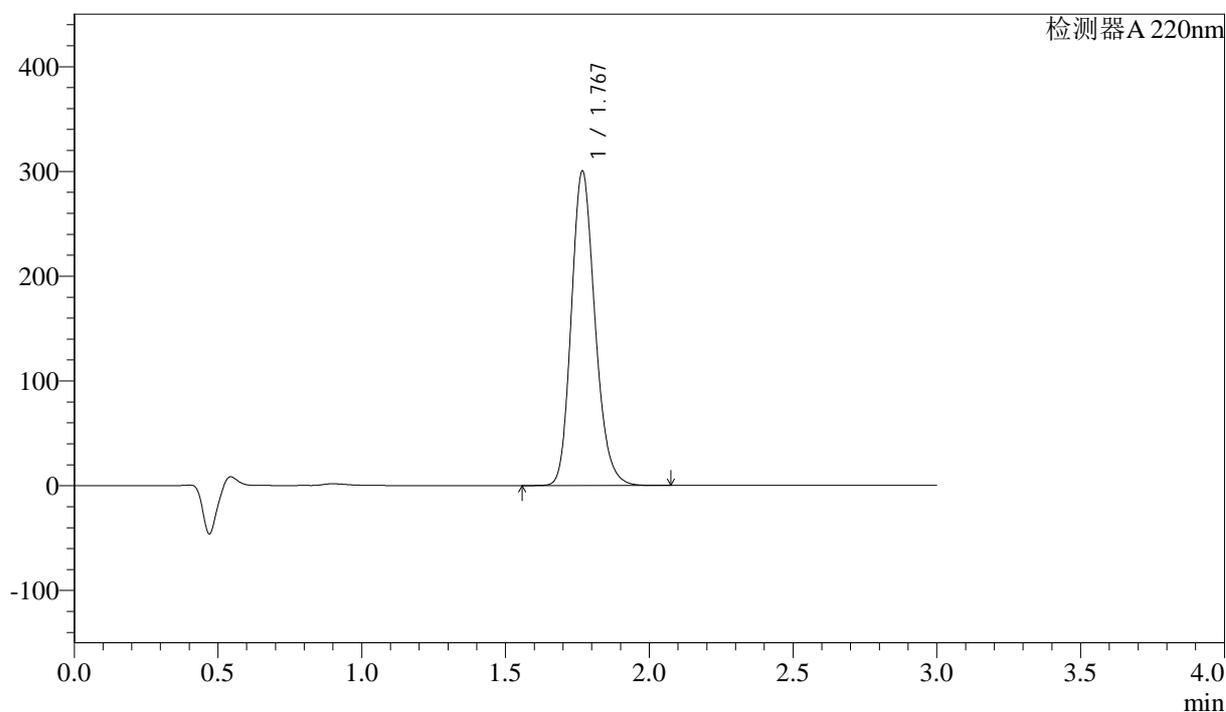

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1718828 | 298692 | 100.000 | 2246       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1718828 | 298692 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-107-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-5  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 17:56:20 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:57:22 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

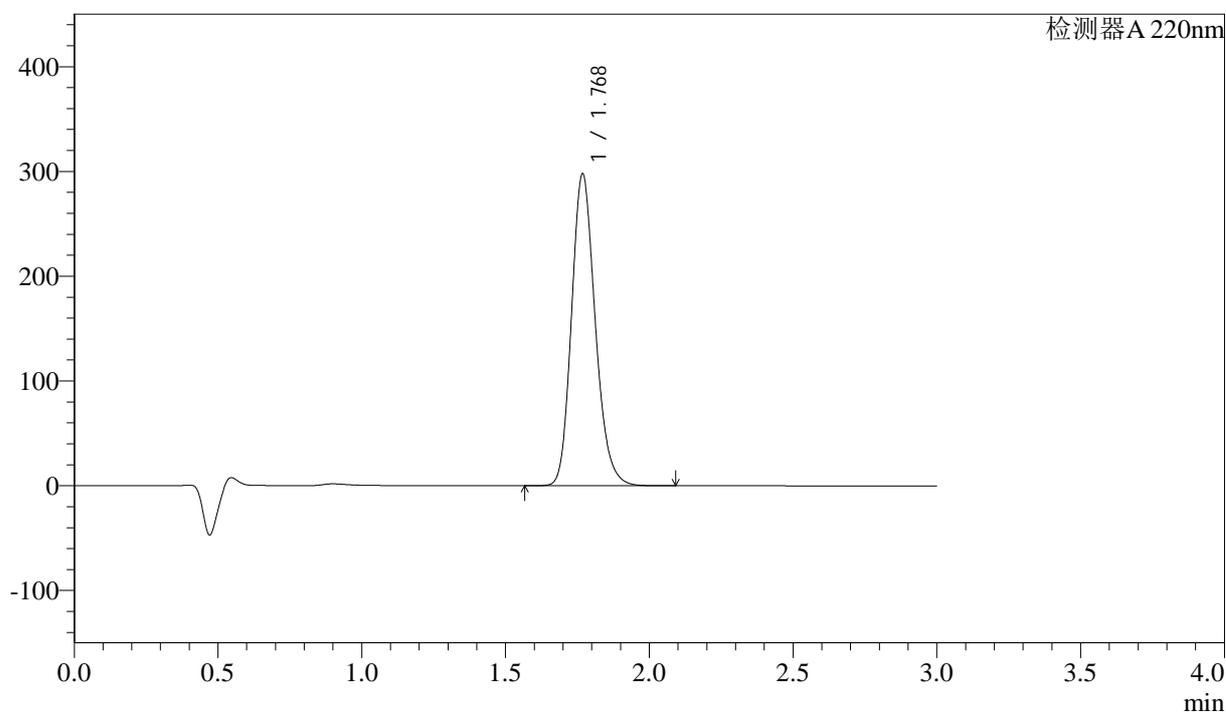

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.768 | 1706664 | 296099 | 100.000 | 2246       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1706664 | 296099 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-108-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-14  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 17:59:41 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:57:25 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

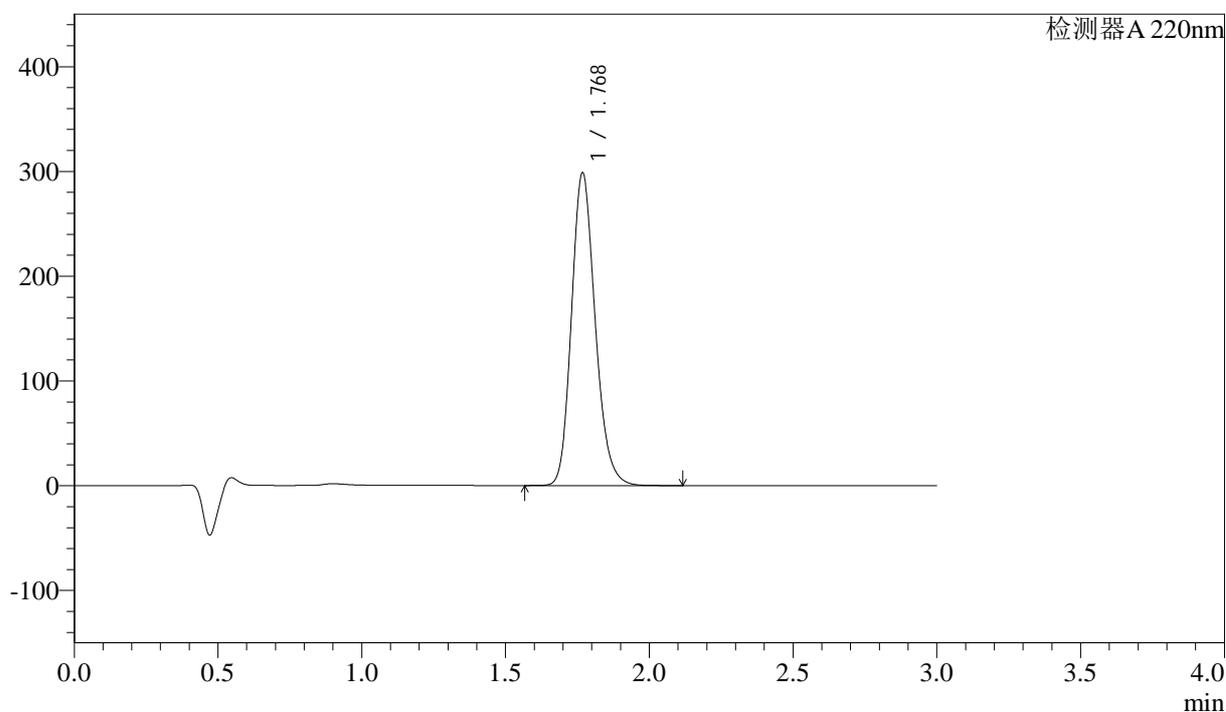

## &lt;峰表&gt;

检测器 A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.768 | 1710563 | 296841 | 100.000 | 2247       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1710563 | 296841 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-109-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-23  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 18:03:03 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:57:27 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

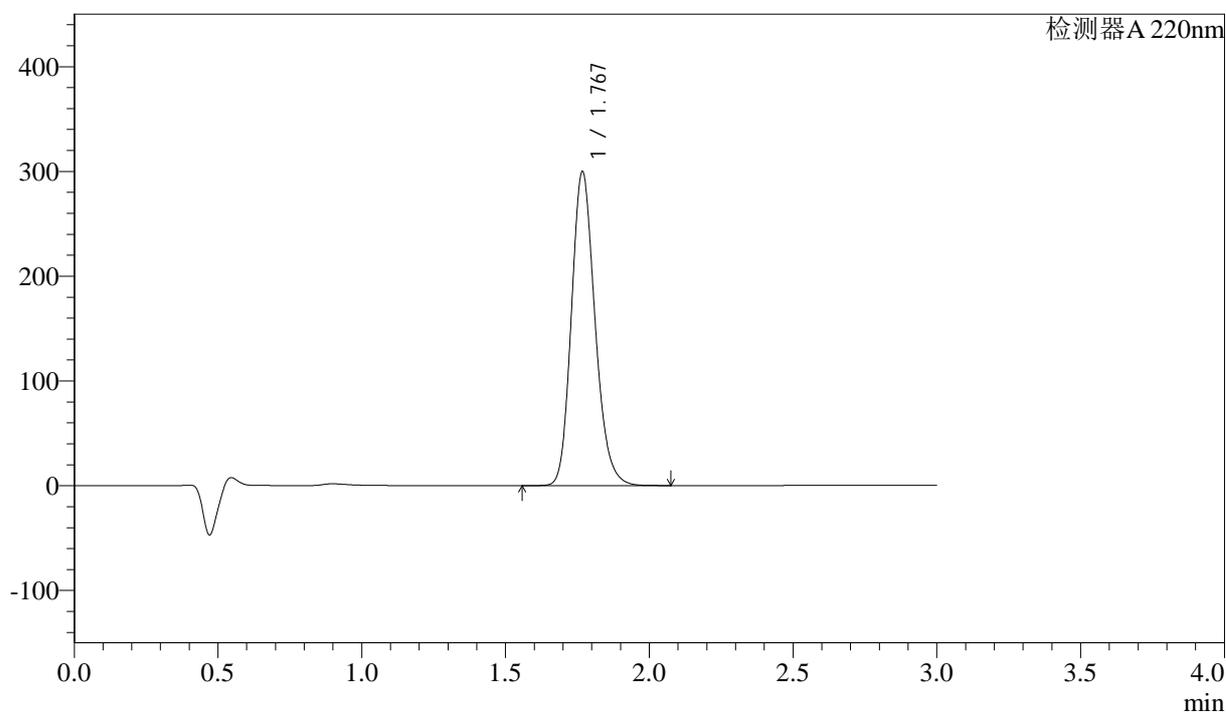

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1712250 | 298037 | 100.000 | 2256       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1712250 | 298037 | 100.000 |            |       |          |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-110-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-32  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 18:06:25      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/01 08:57:30 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV

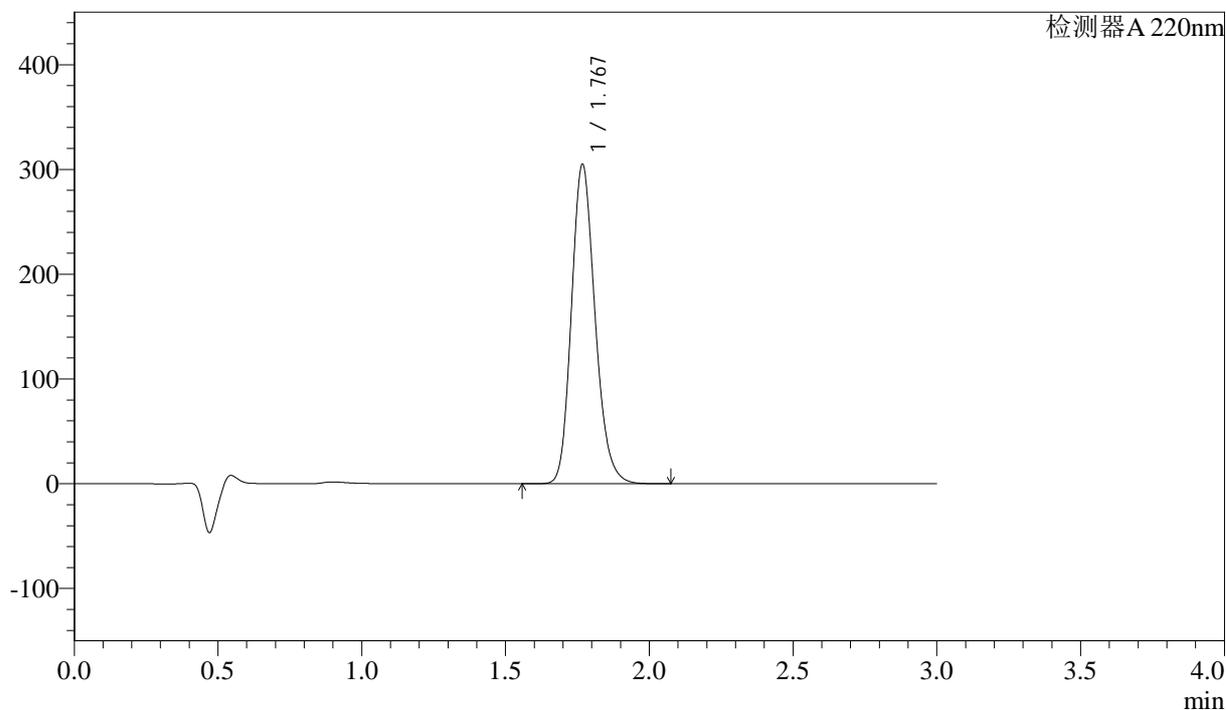

<峰表>

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1742372 | 303115 | 100.000 | 2256       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1742372 | 303115 | 100.000 |            |       |          |


图110 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-111-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-41  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 18:09:47 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:57:32 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

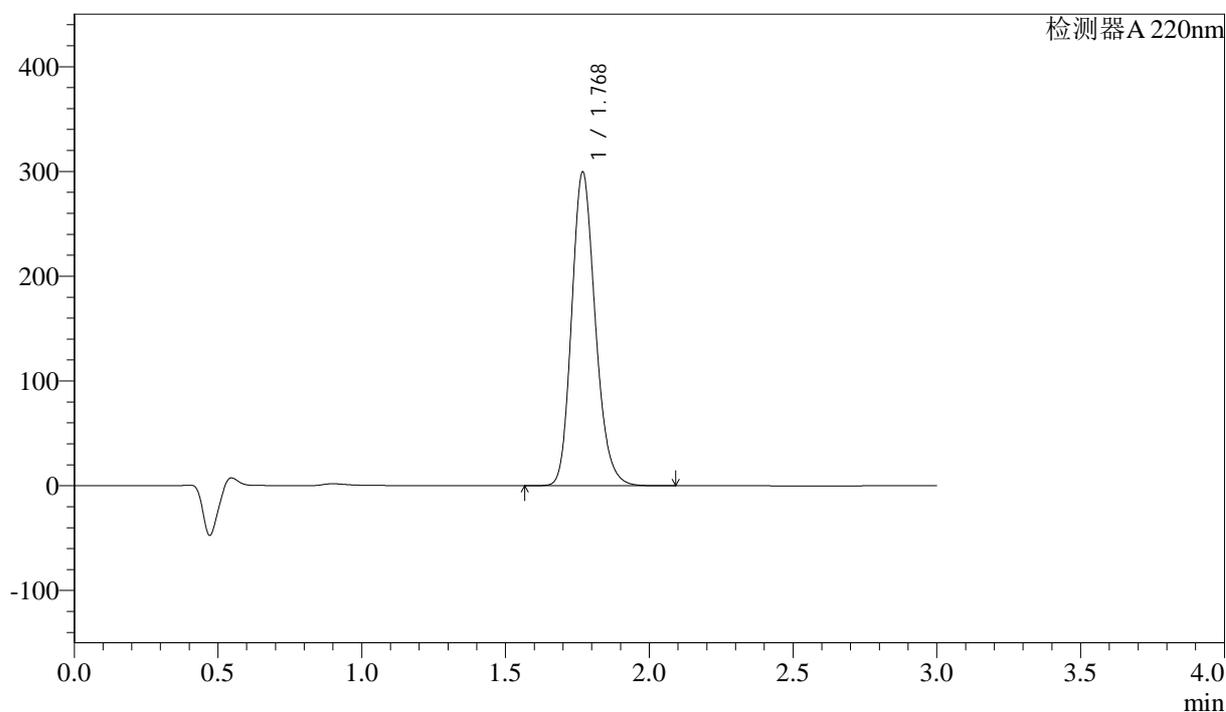

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.768 | 1711512 | 298105 | 100.000 | 2257       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1711512 | 298105 | 100.000 |            |       |          |


图111 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-112-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-50  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 18:13:09 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:57:35 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

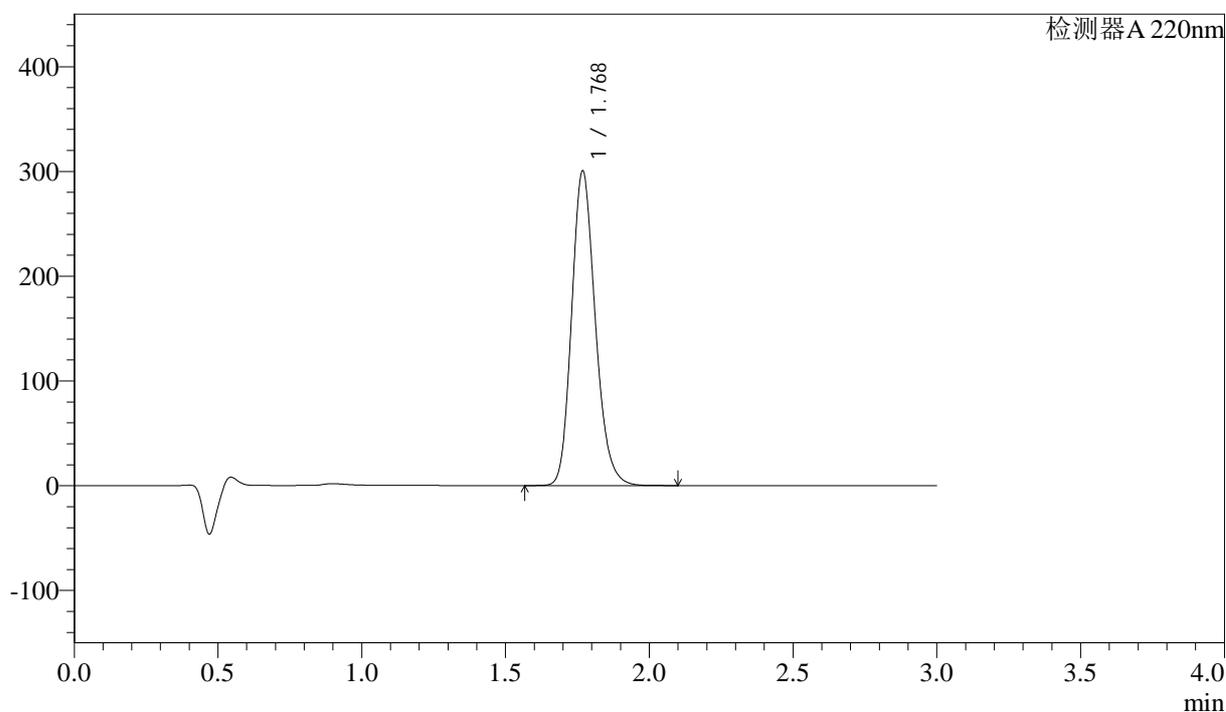

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.768 | 1717178 | 298879 | 100.000 | 2256       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1717178 | 298879 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-113-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 18:16:32 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:57:37 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

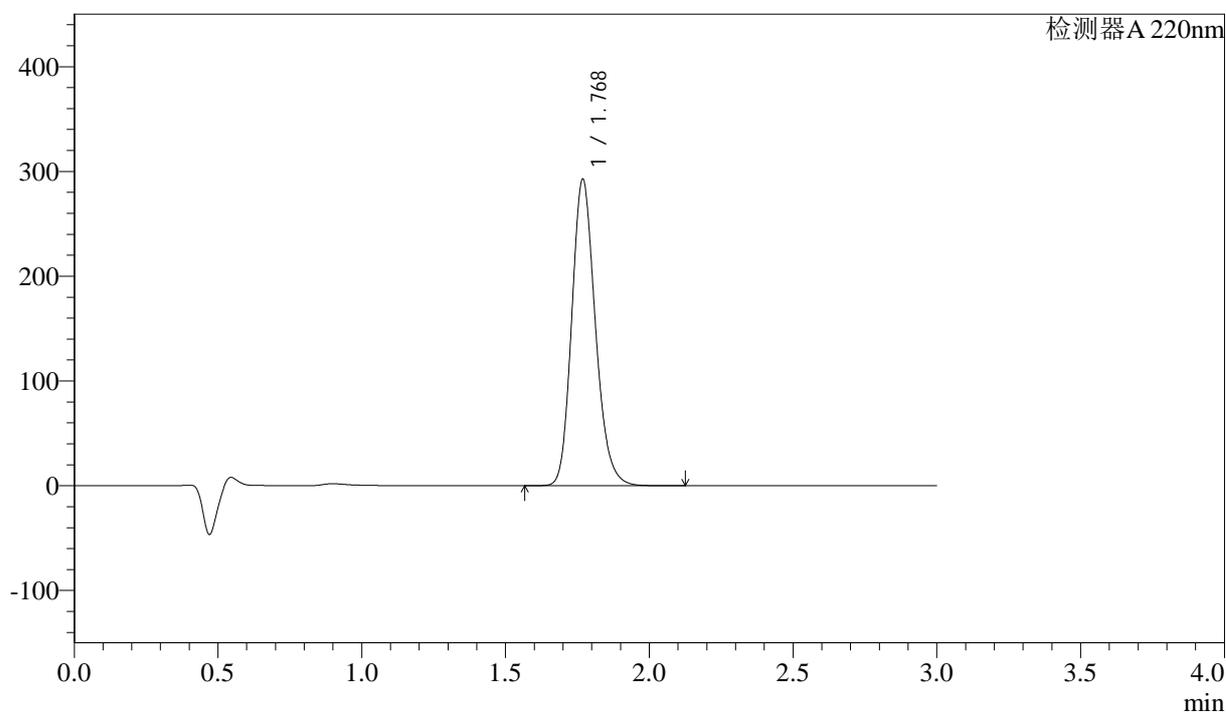

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.768 | 1671926 | 291301 | 100.000 | 2259       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1671926 | 291301 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-114-2 - zzp-24061902p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 18:19:55 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:57:40 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

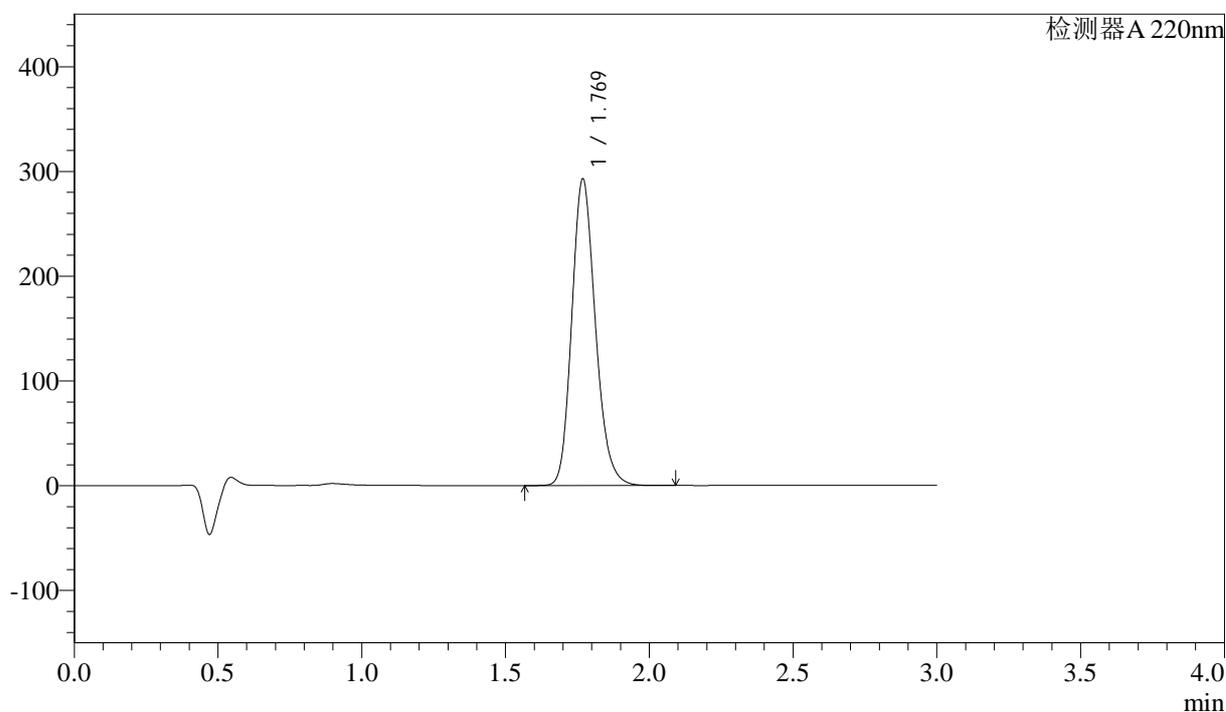

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.769 | 1672450 | 291645 | 100.000 | 2260       | 1.183 | --       |
| 总计 |       | 1672450 | 291645 | 100.000 |            |       |          |


图114 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24061902批(60mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-2

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-115-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-9  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 18:23:19 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:57:42 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

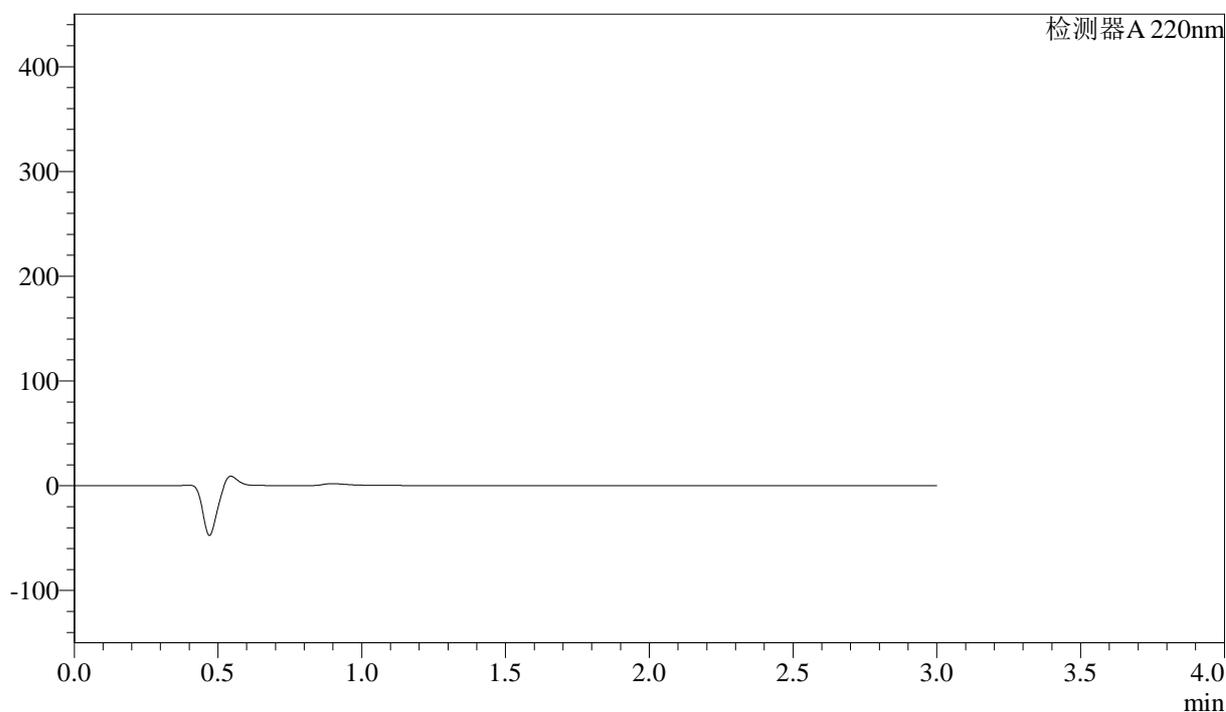

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 高度 | 面积% | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|----|-----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |    |     |            |      |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-116-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 18:26:43 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:57:45 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

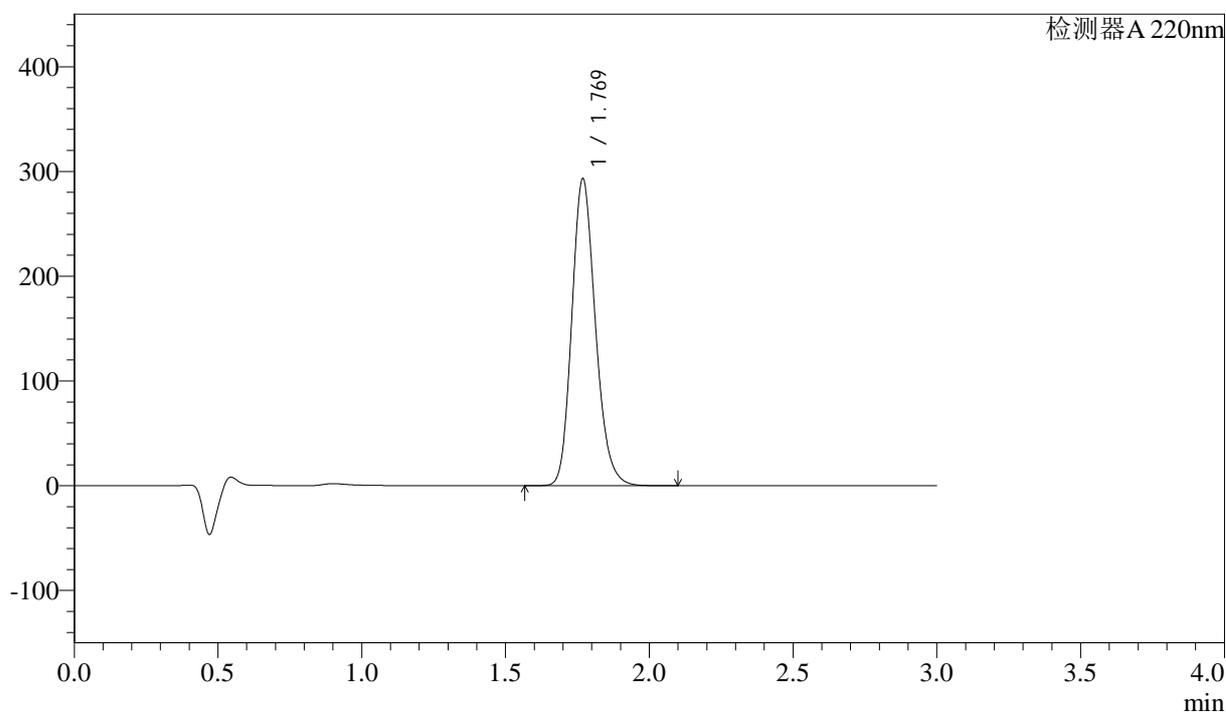

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.769 | 1674237 | 292004 | 100.000 | 2261       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 1674237 | 292004 | 100.000 |            |       |          |


图116 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-117-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 18:30:07 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:57:47 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

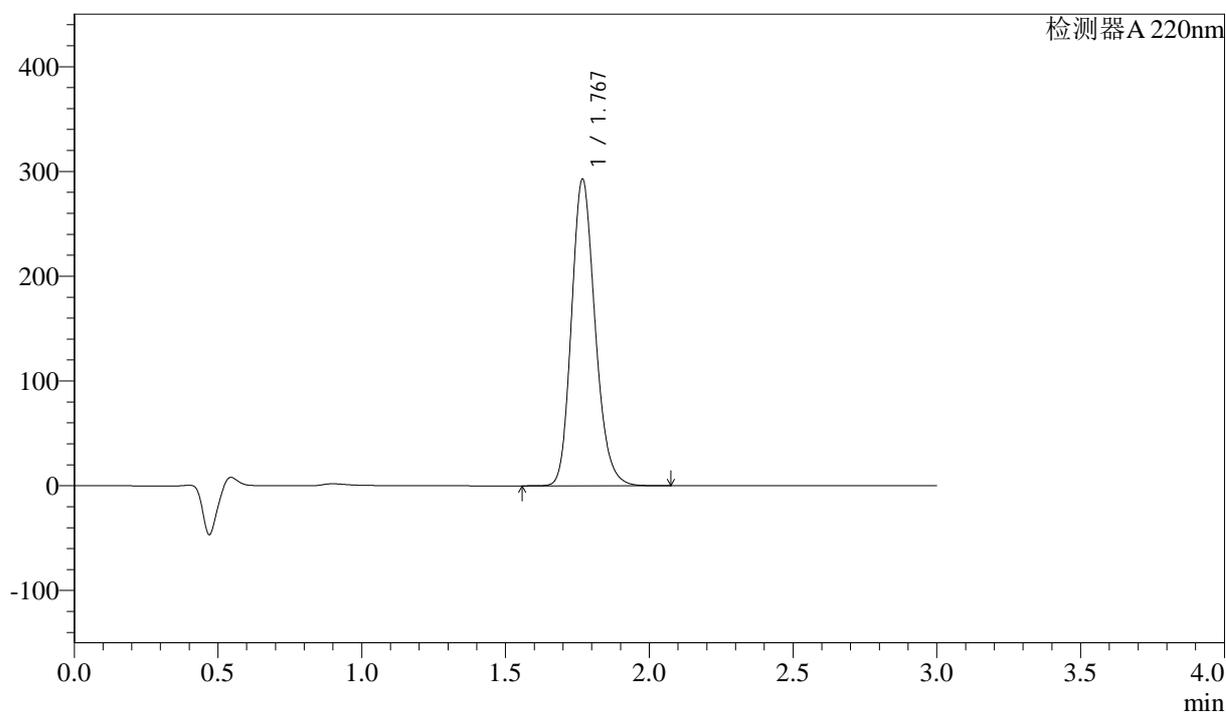

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1672827 | 290801 | 100.000 | 2254       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 1672827 | 290801 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-118-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 18:33:30 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:57:50 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

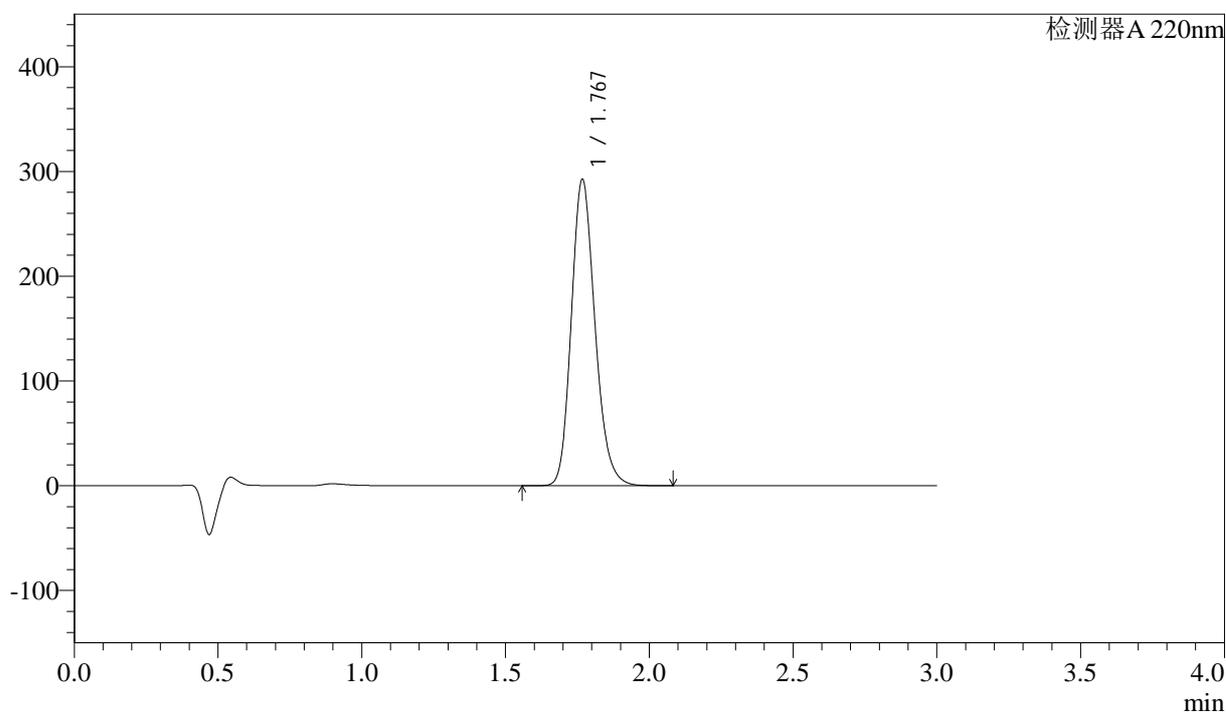

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1674338 | 291071 | 100.000 | 2248       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1674338 | 291071 | 100.000 |            |       |          |


图118 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-3

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-119-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 18:36:54 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:57:52 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

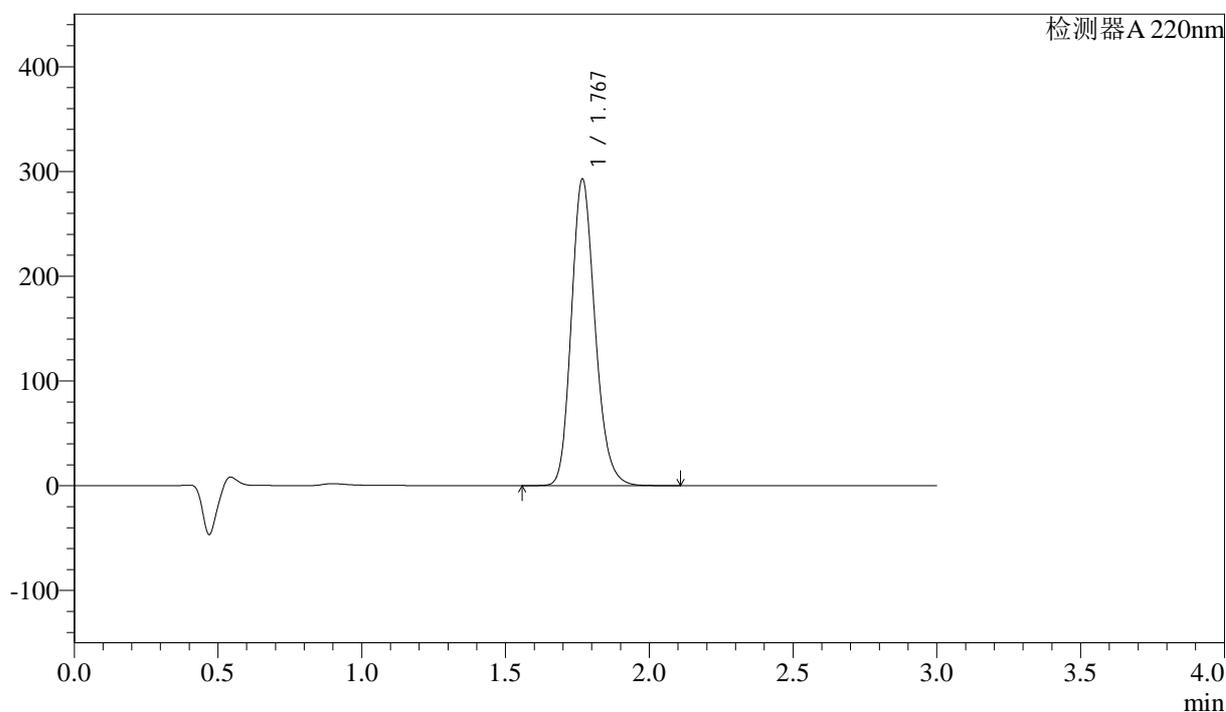

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1675839 | 291049 | 100.000 | 2247       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 1675839 | 291049 | 100.000 |            |       |          |


图119 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-4

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-120-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 18:40:18 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:57:55 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

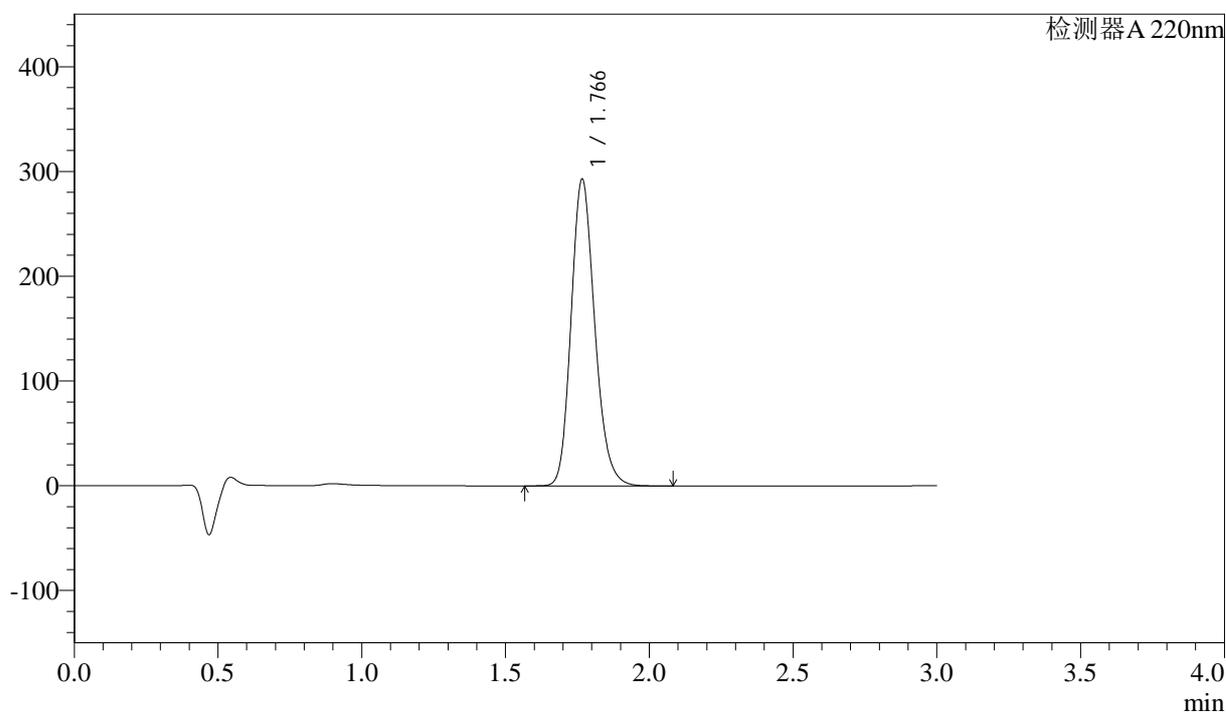

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1673824 | 291978 | 100.000 | 2252       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 1673824 | 291978 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-121-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-1  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 18:43:41 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:57:58 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

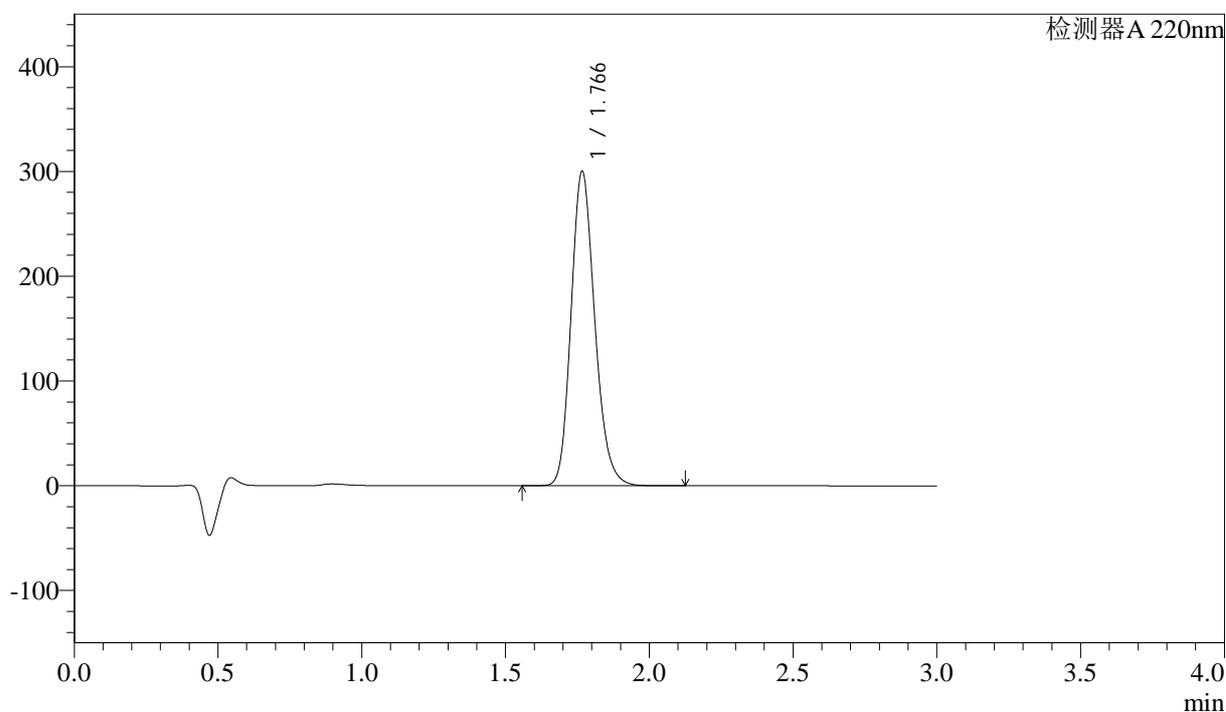

## &lt;峰表&gt;

检测器 A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1721551 | 299296 | 100.000 | 2238       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1721551 | 299296 | 100.000 |            |       |          |


图121 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-122-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-10  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 18:47:03 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:00 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

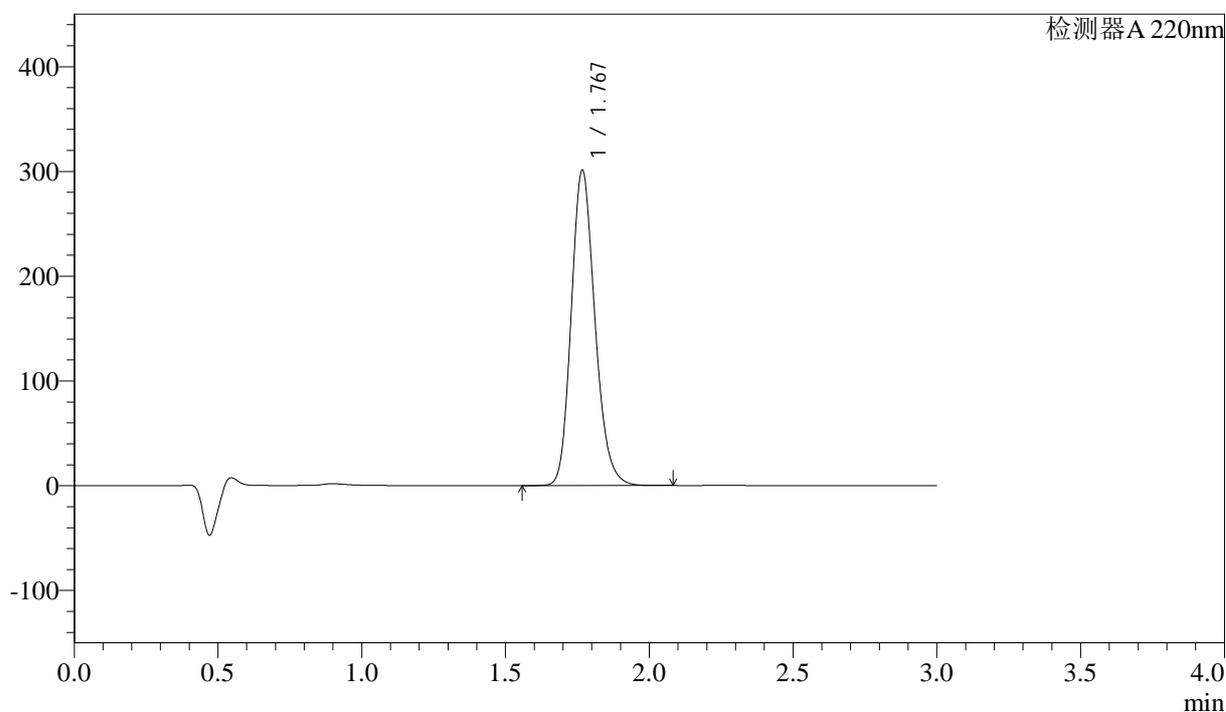

## &lt;峰表&gt;

检测器 A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1726286 | 299798 | 100.000 | 2240       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1726286 | 299798 | 100.000 |            |       |          |


图122 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-123-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-19  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 18:50:26 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:03 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

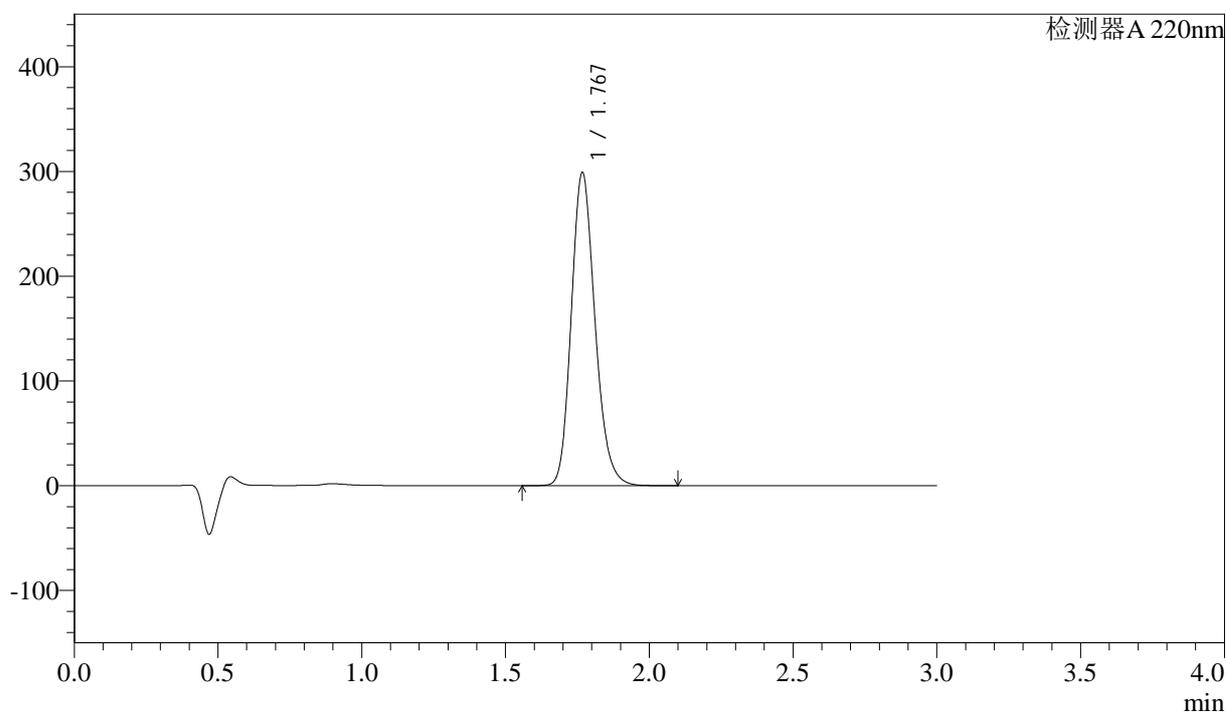

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1714108 | 297505 | 100.000 | 2241       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1714108 | 297505 | 100.000 |            |       |          |


图123 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-124-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-28  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 18:53:49 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:05 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

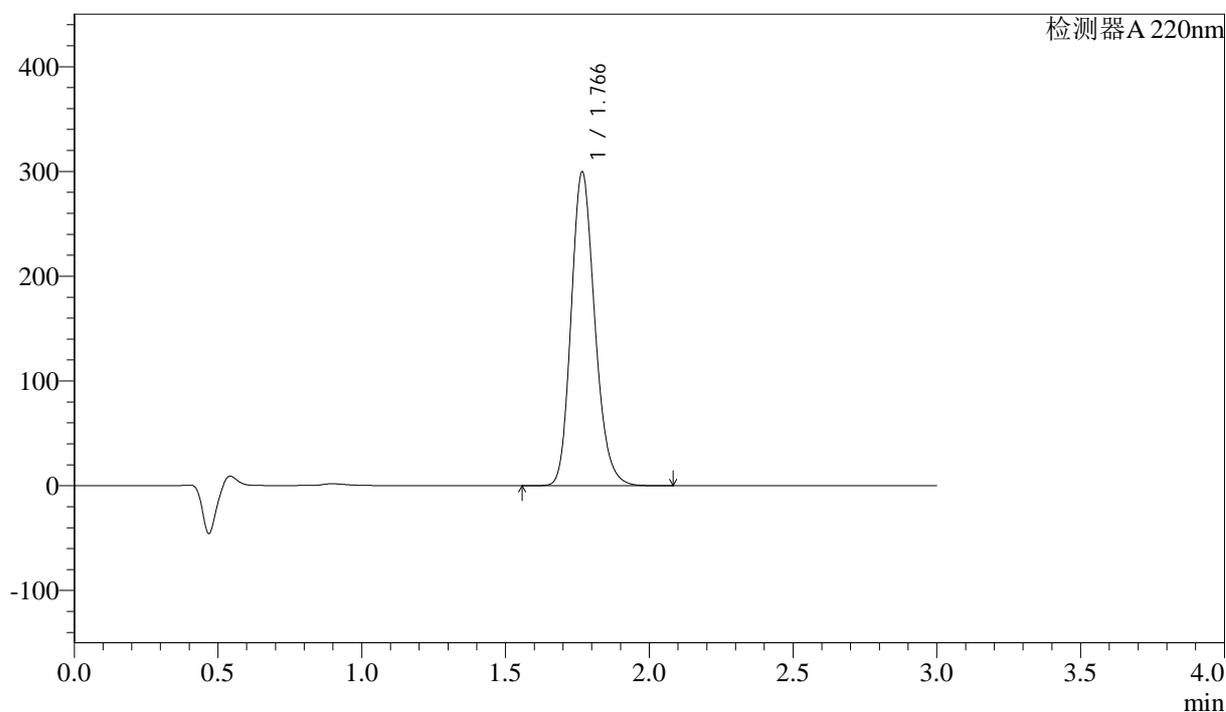

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1715104 | 298586 | 100.000 | 2246       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1715104 | 298586 | 100.000 |            |       |          |


图124 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片4  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-125-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-37  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 18:57:11      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/01 08:58:08 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

### <色谱图>

mV

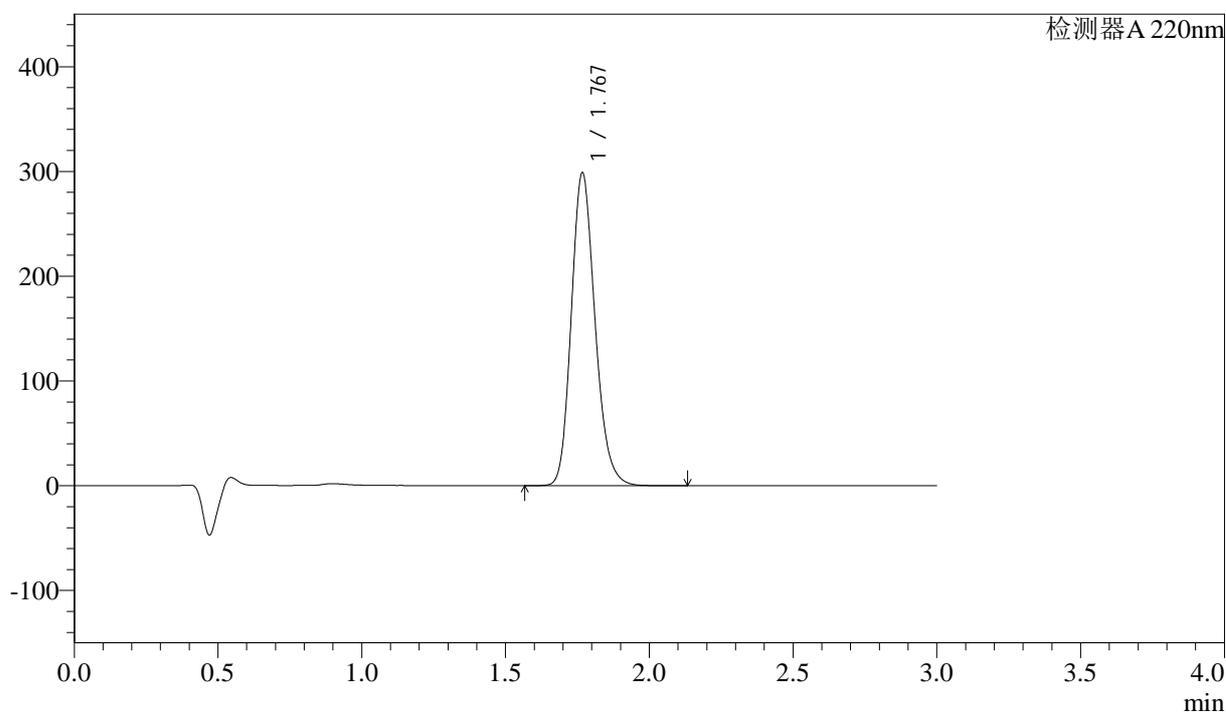

### <峰表>

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1714351 | 297241 | 100.000 | 2237       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1714351 | 297241 | 100.000 |            |       |          |


图125 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-126-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-46  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 19:00:34 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:58:10 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

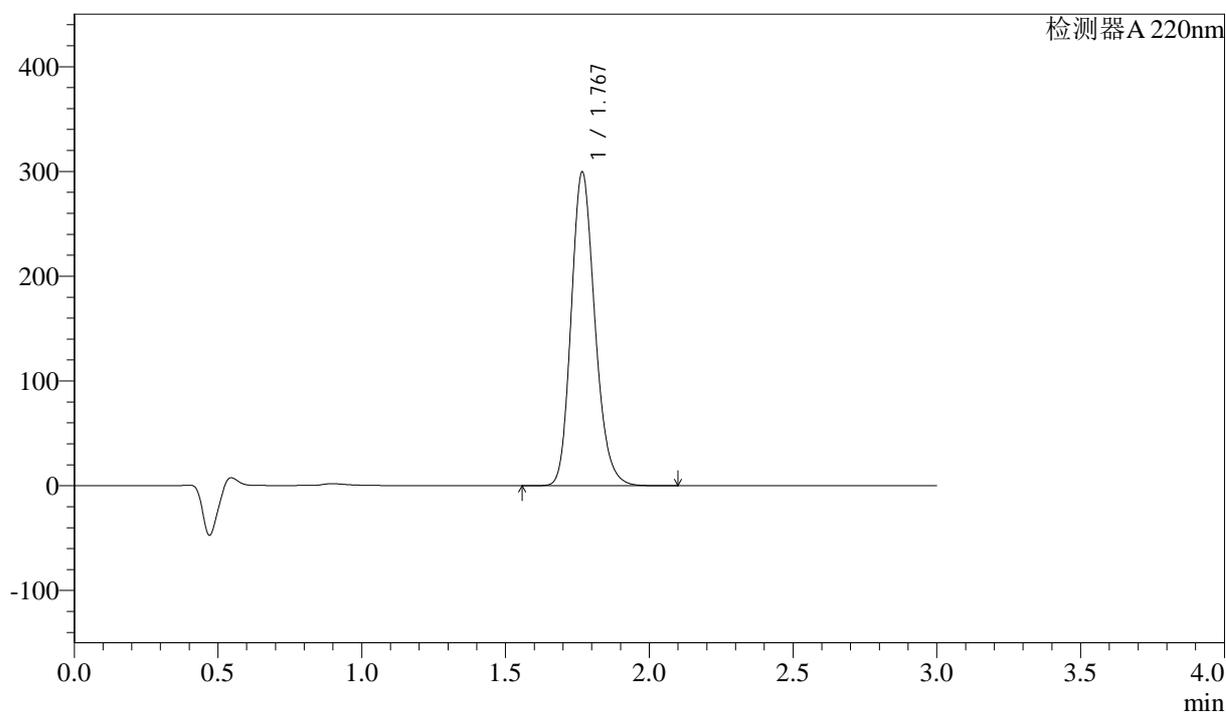

## &lt;峰表&gt;

检测器 A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1717574 | 298317 | 100.000 | 2238       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1717574 | 298317 | 100.000 |            |       |          |


图126 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-127-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-2  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 19:03:57 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:13 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

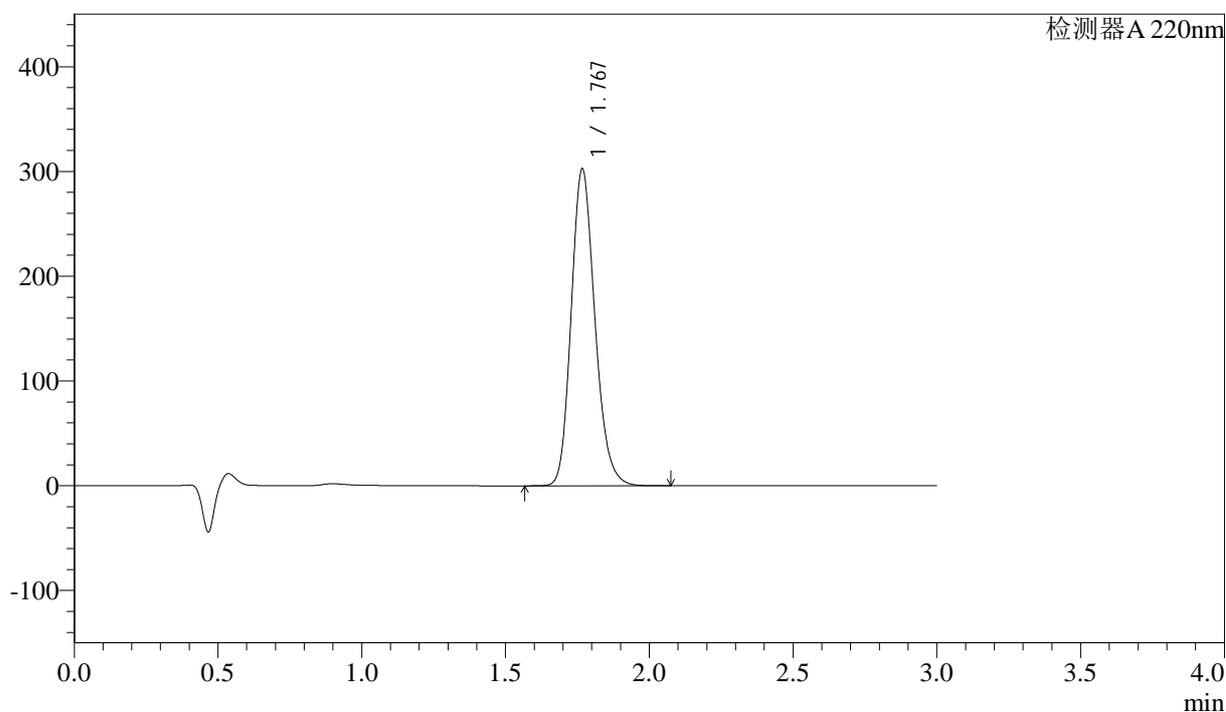

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1733619 | 301364 | 100.000 | 2241       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 1733619 | 301364 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-128-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-11  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 19:07:20 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:15 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

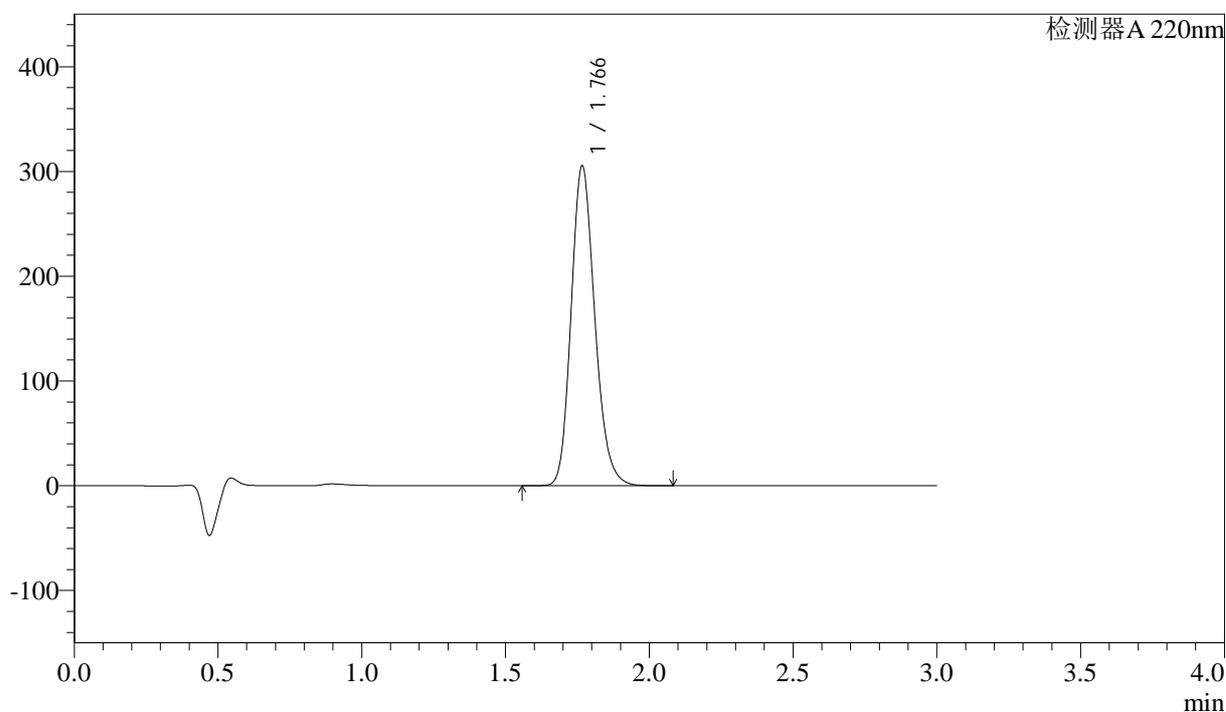

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1748939 | 304322 | 100.000 | 2243       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 1748939 | 304322 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-129-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-20  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 19:10:43 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:18 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

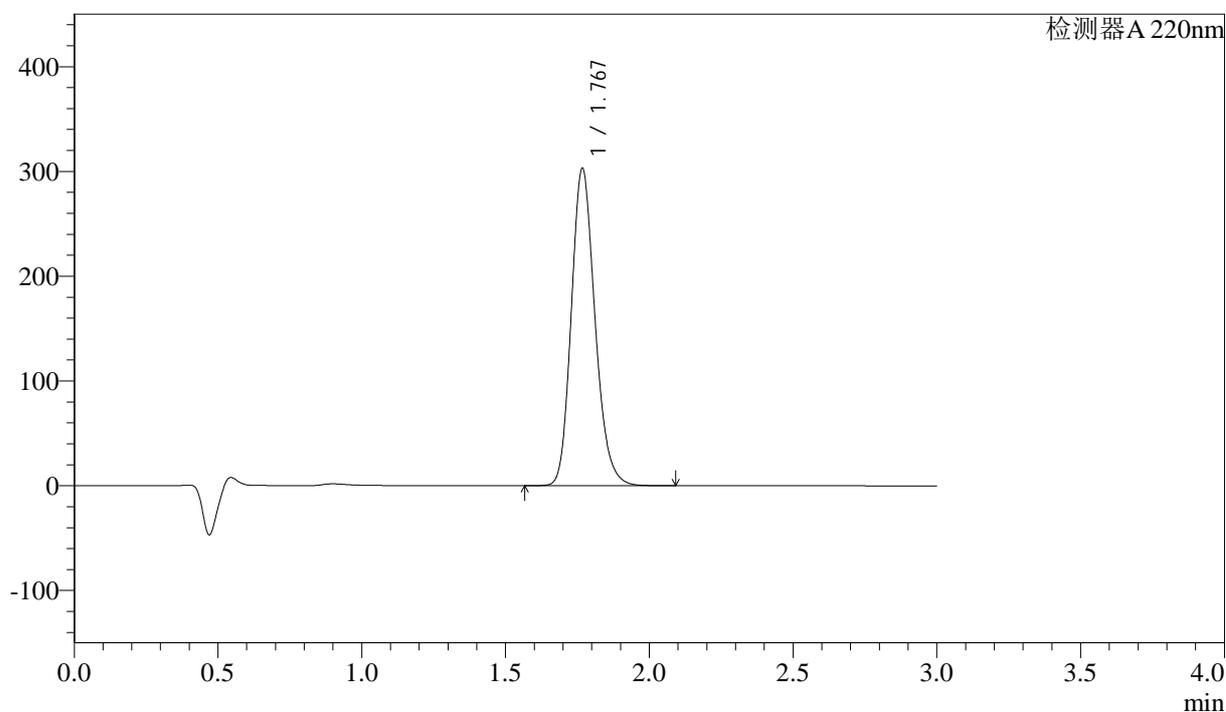

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1735876 | 301494 | 100.000 | 2243       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 1735876 | 301494 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-130-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-29  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 19:14:06 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:20 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

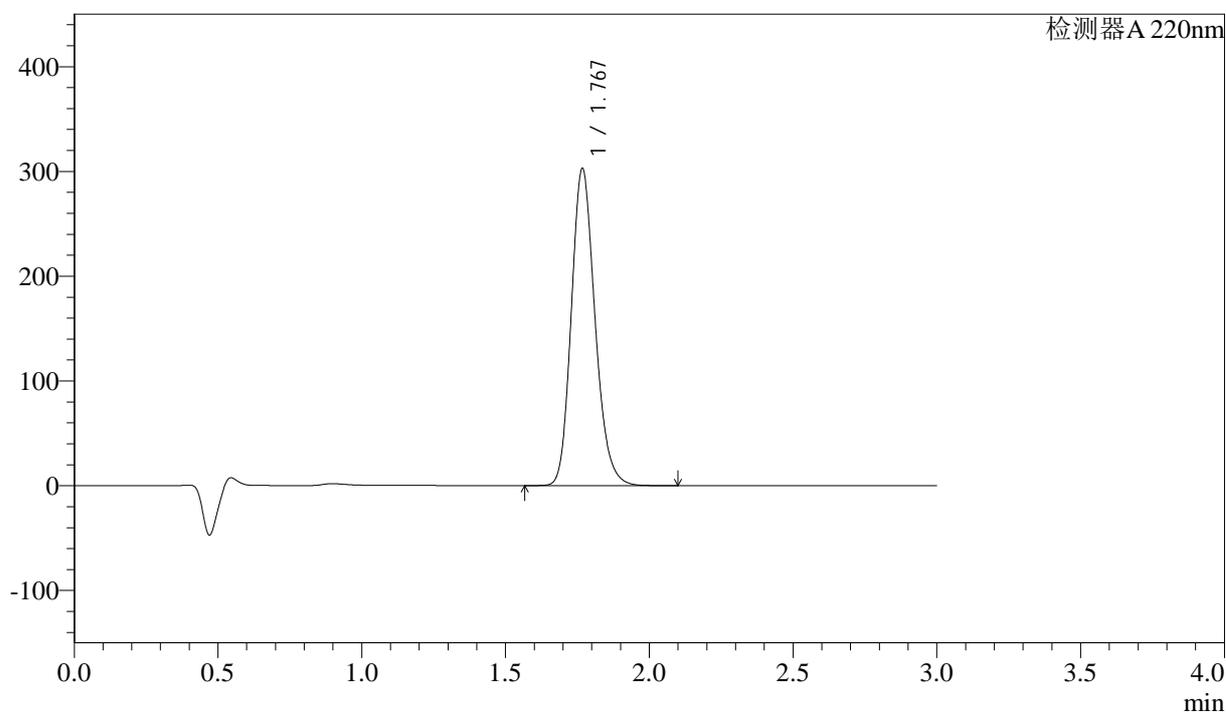

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1735406 | 301236 | 100.000 | 2241       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1735406 | 301236 | 100.000 |            |       |          |


图130 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-131-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-38  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 19:17:28 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:23 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

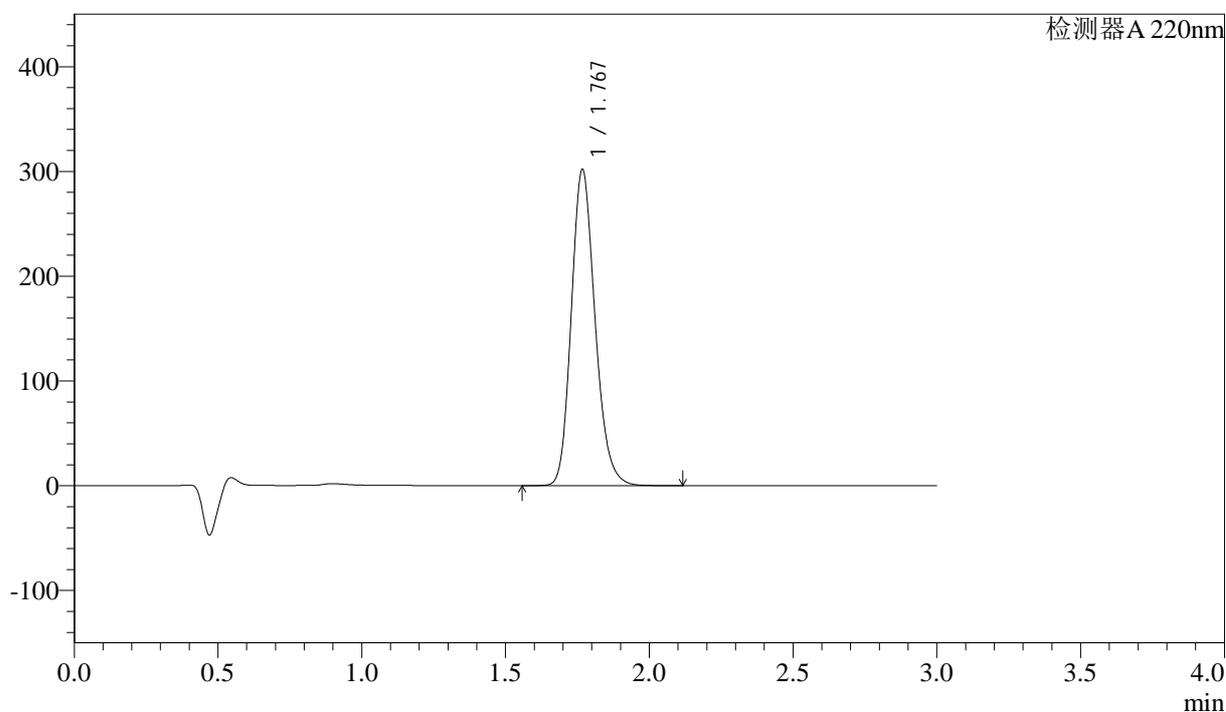

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1732596 | 300259 | 100.000 | 2235       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1732596 | 300259 | 100.000 |            |       |          |


图131 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-132-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-47  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 19:20:50 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:25 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

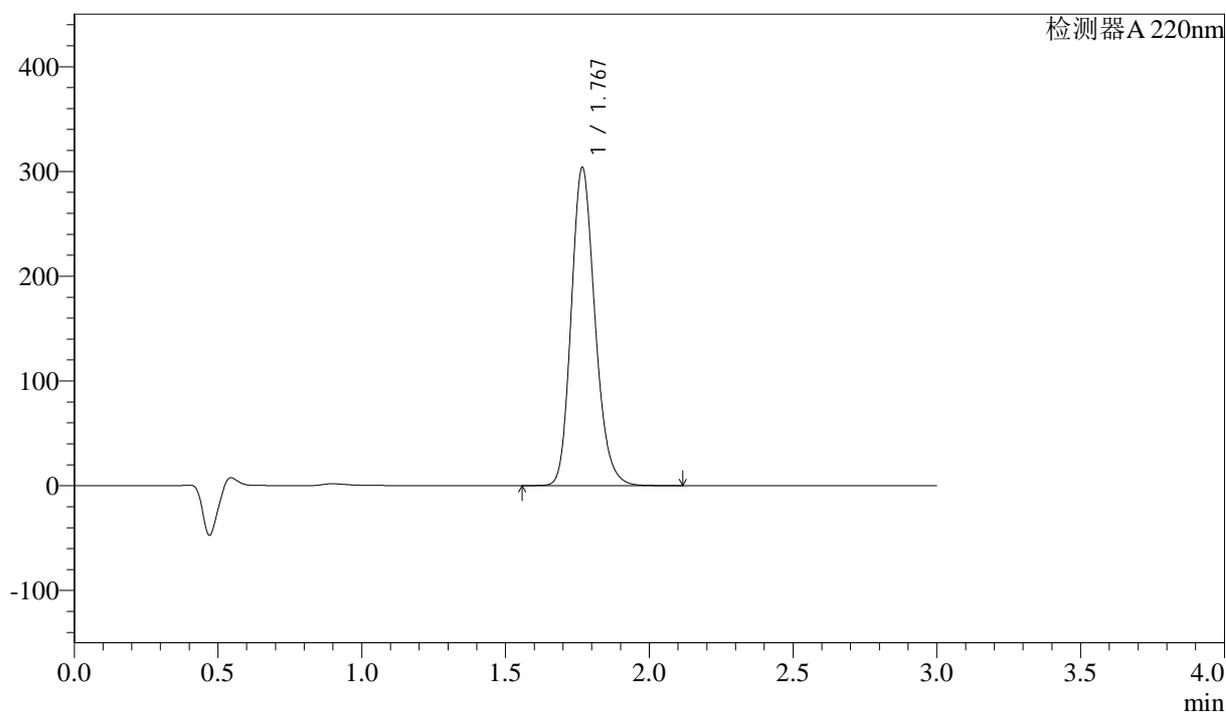

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1742644 | 302283 | 100.000 | 2237       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1742644 | 302283 | 100.000 |            |       |          |


图132 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-133-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-3  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 19:24:14 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:28 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

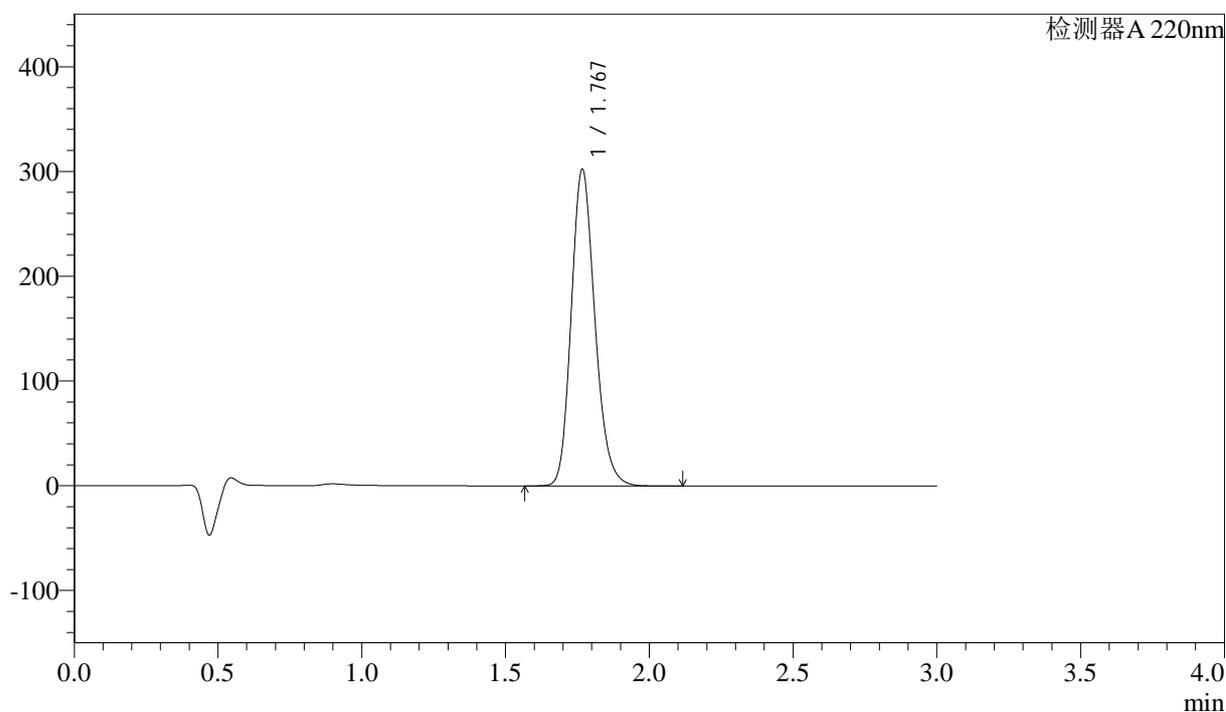

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1730824 | 301014 | 100.000 | 2245       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1730824 | 301014 | 100.000 |            |       |          |


图133 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-134-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-12  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 19:27:37 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:31 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

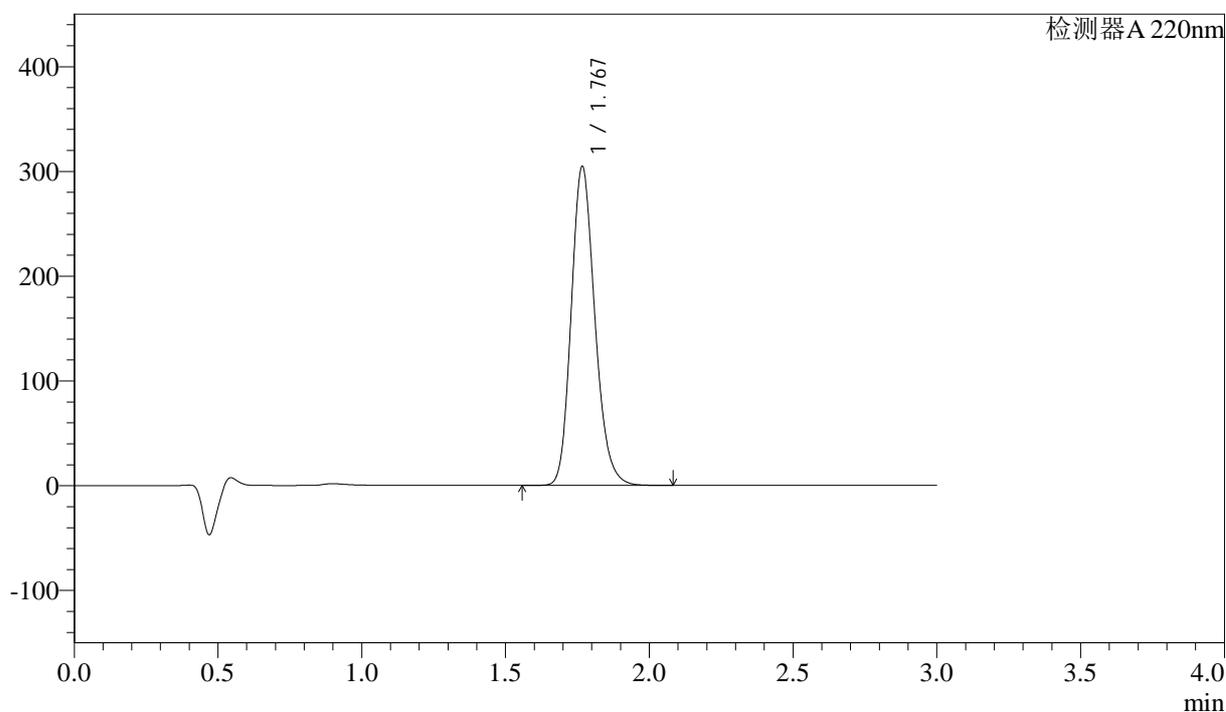

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1743085 | 303301 | 100.000 | 2246       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1743085 | 303301 | 100.000 |            |       |          |


图134 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-135-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-21  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 19:31:00 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:33 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

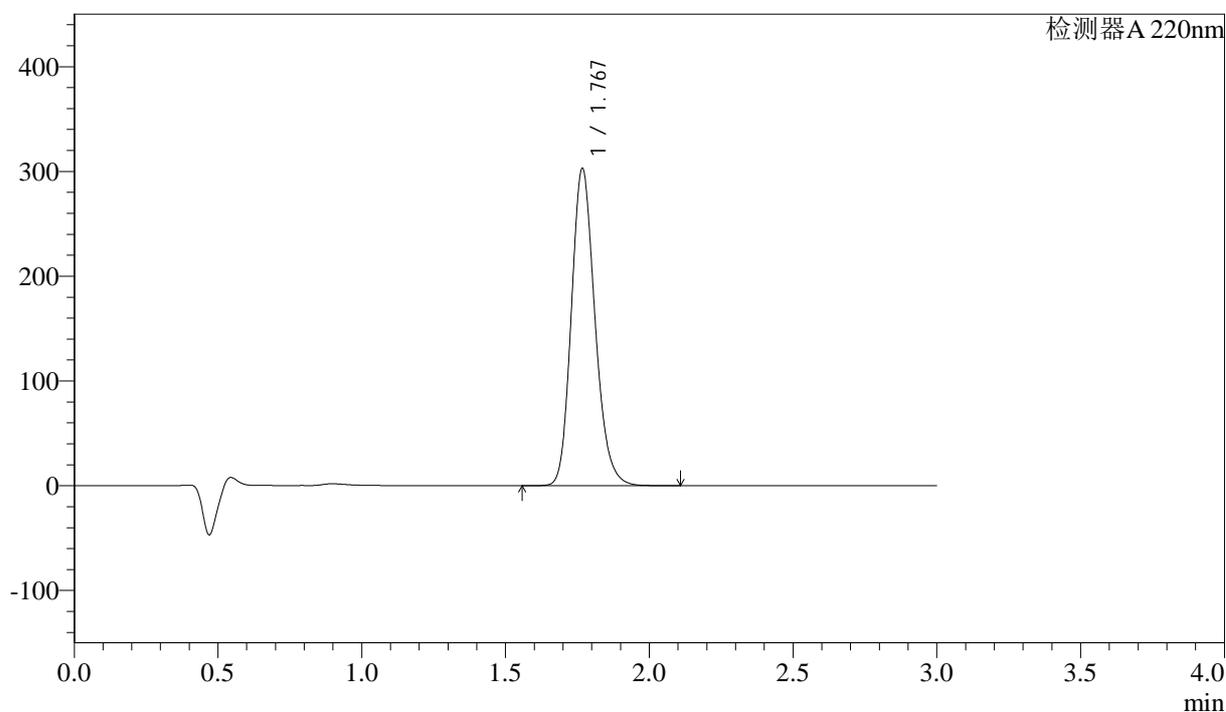

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1733045 | 301323 | 100.000 | 2250       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1733045 | 301323 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-136-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-30  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 19:34:23 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:36 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

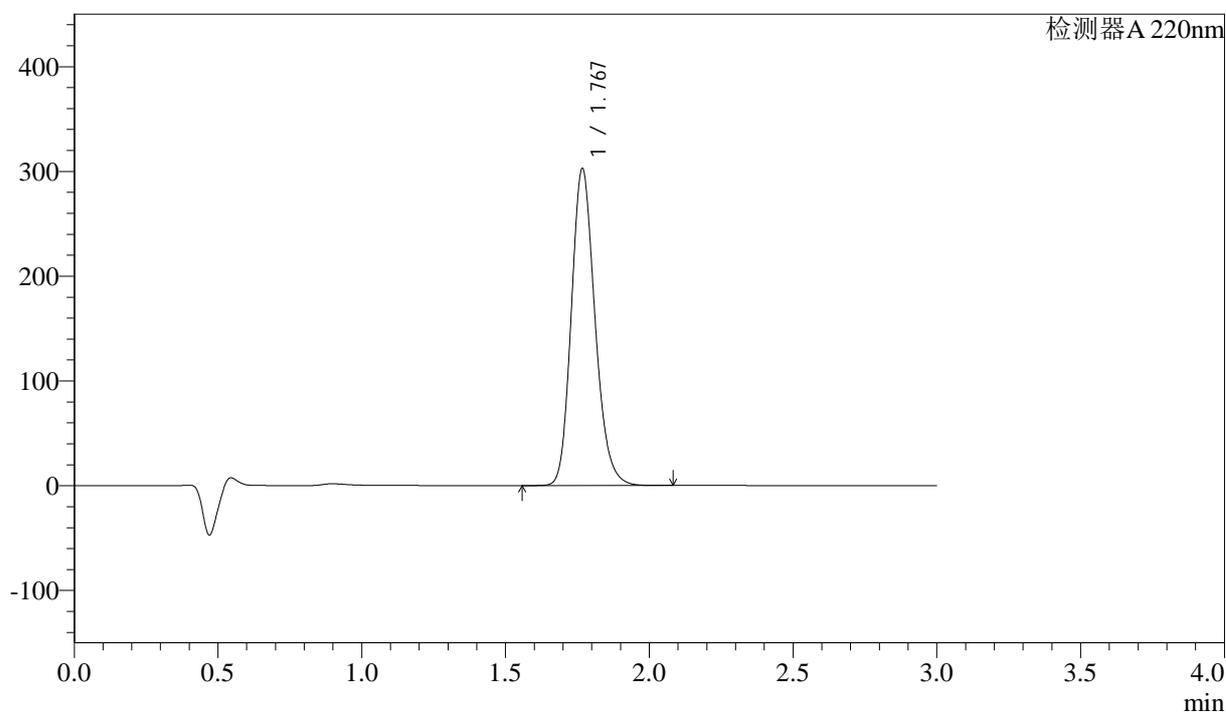

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1734147 | 301089 | 100.000 | 2242       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1734147 | 301089 | 100.000 |            |       |          |


图136 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-137-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-39  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 19:37:46 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:38 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

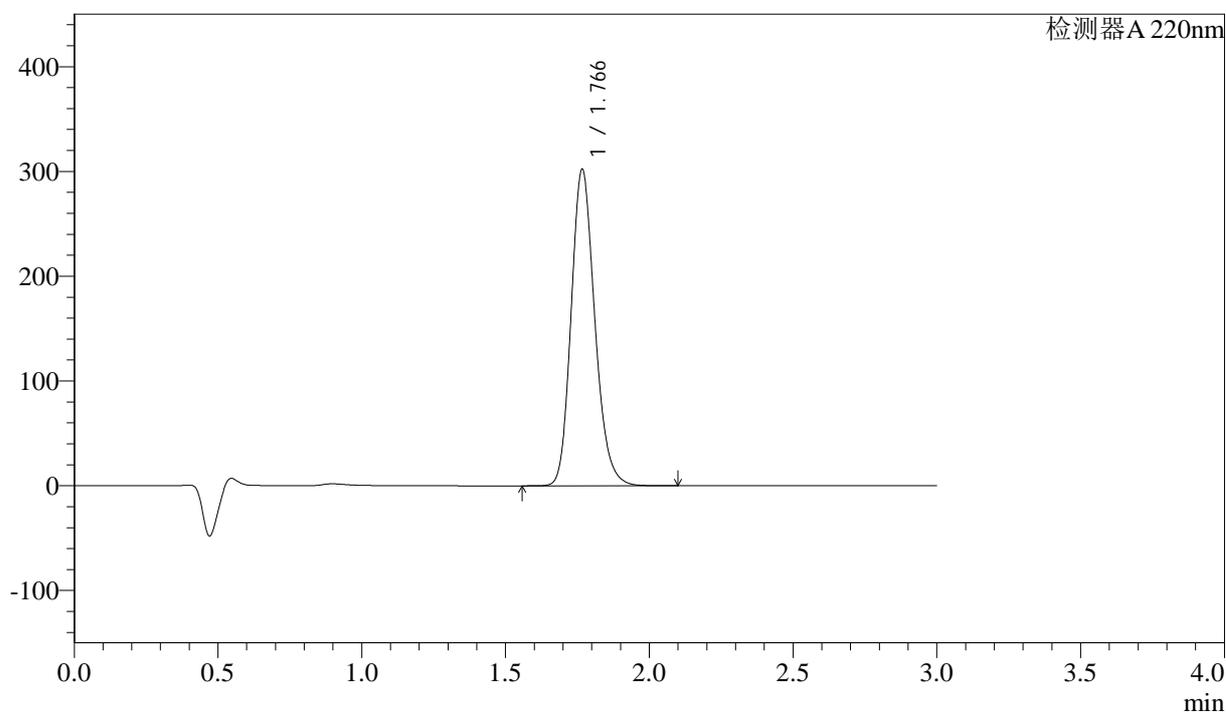

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1727959 | 301148 | 100.000 | 2250       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1727959 | 301148 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-138-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-48  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 19:41:09 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:41 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

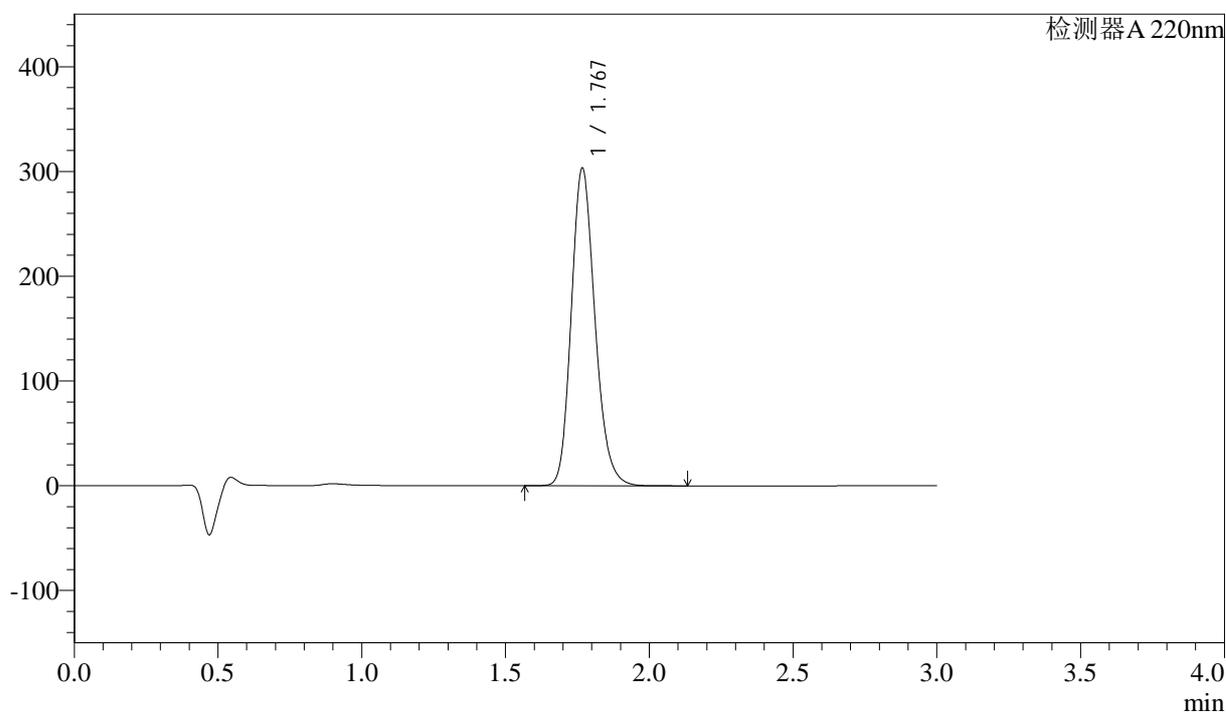

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1735826 | 301816 | 100.000 | 2247       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1735826 | 301816 | 100.000 |            |       |          |


图138 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-139-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-4  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 19:44:33 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:58:43 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

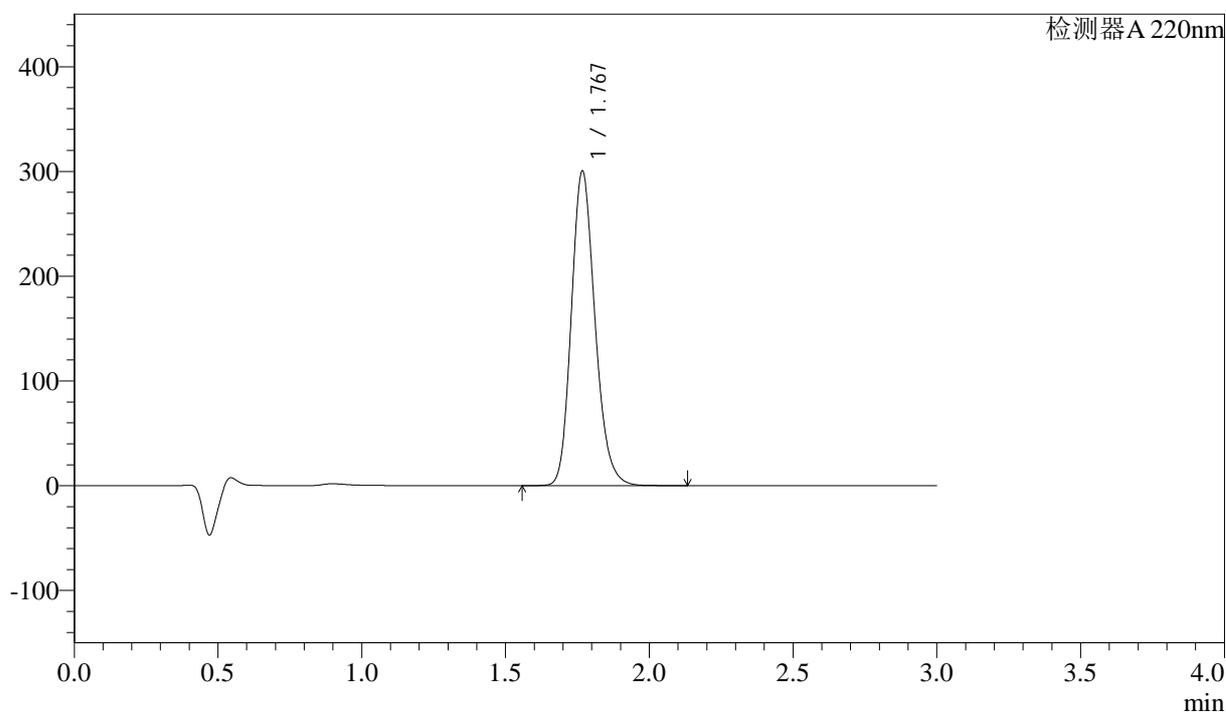

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1719264 | 298764 | 100.000 | 2248       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1719264 | 298764 | 100.000 |            |       |          |


图139 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-140-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-13  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 19:47:57 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:58:46 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

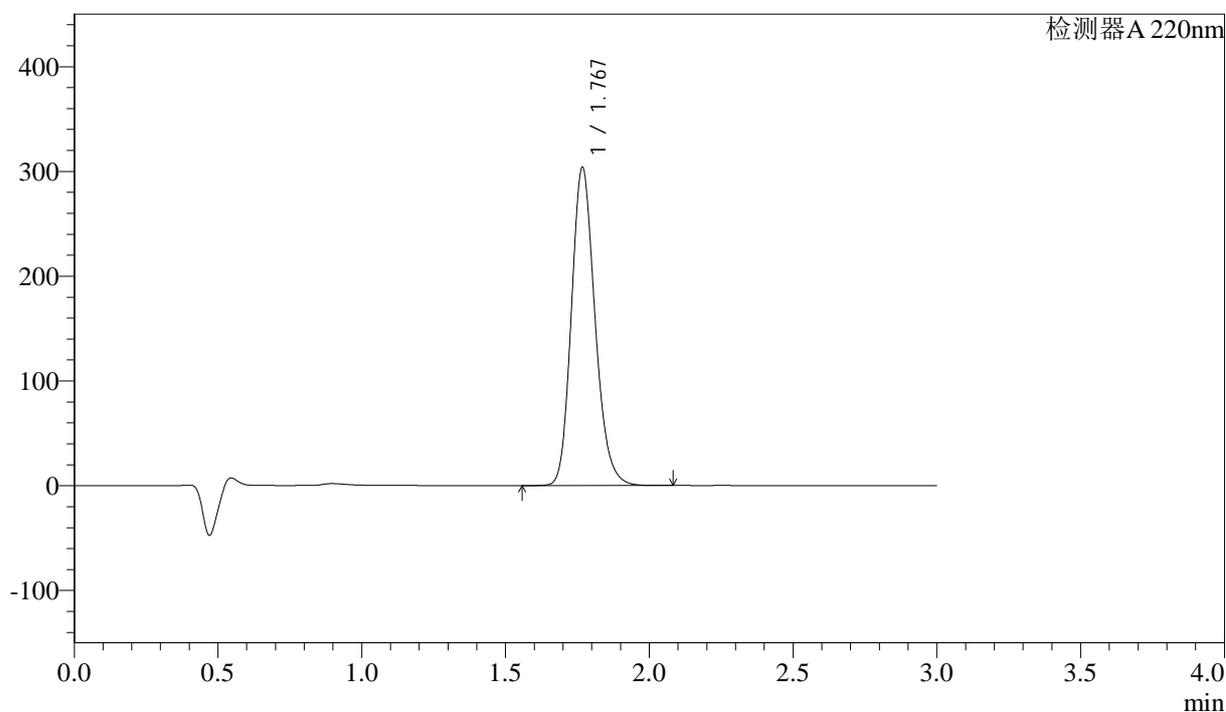

## &lt;峰表&gt;

检测器 A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1736578 | 302114 | 100.000 | 2253       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1736578 | 302114 | 100.000 |            |       |          |


图140 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-141-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-22  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 19:51:20 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:48 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

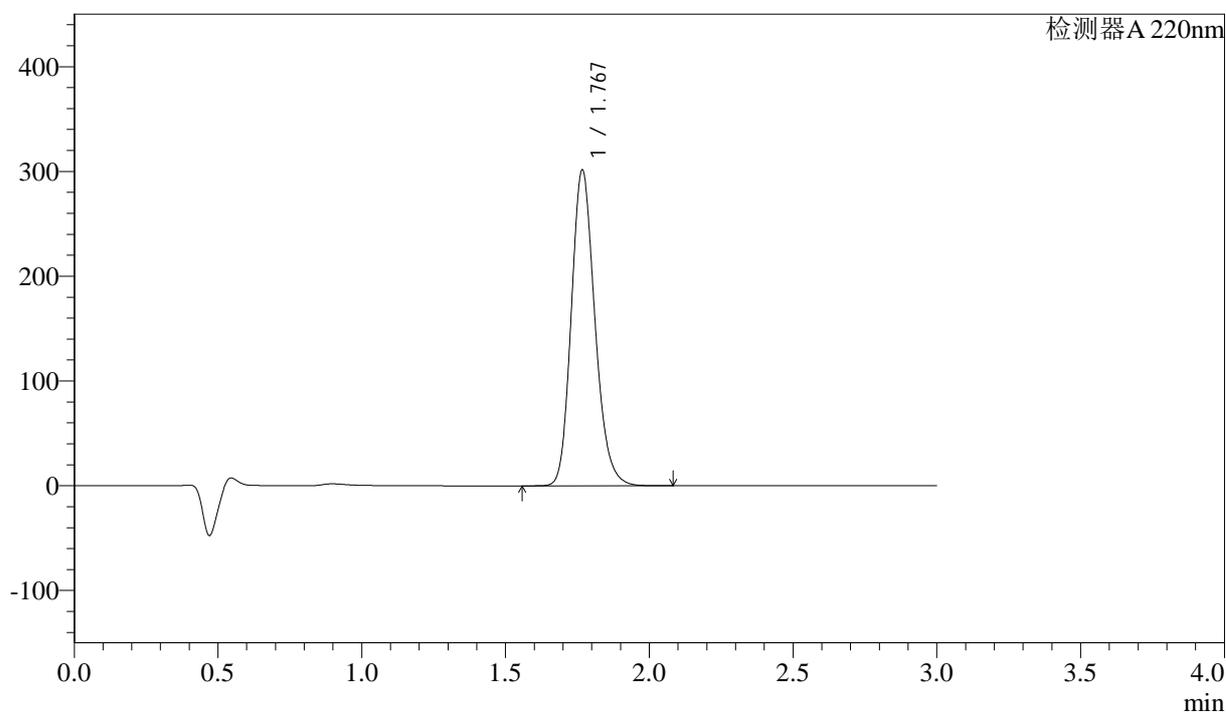

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1723651 | 300314 | 100.000 | 2255       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1723651 | 300314 | 100.000 |            |       |          |


图141 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-142-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-31  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 19:54:44 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:51 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

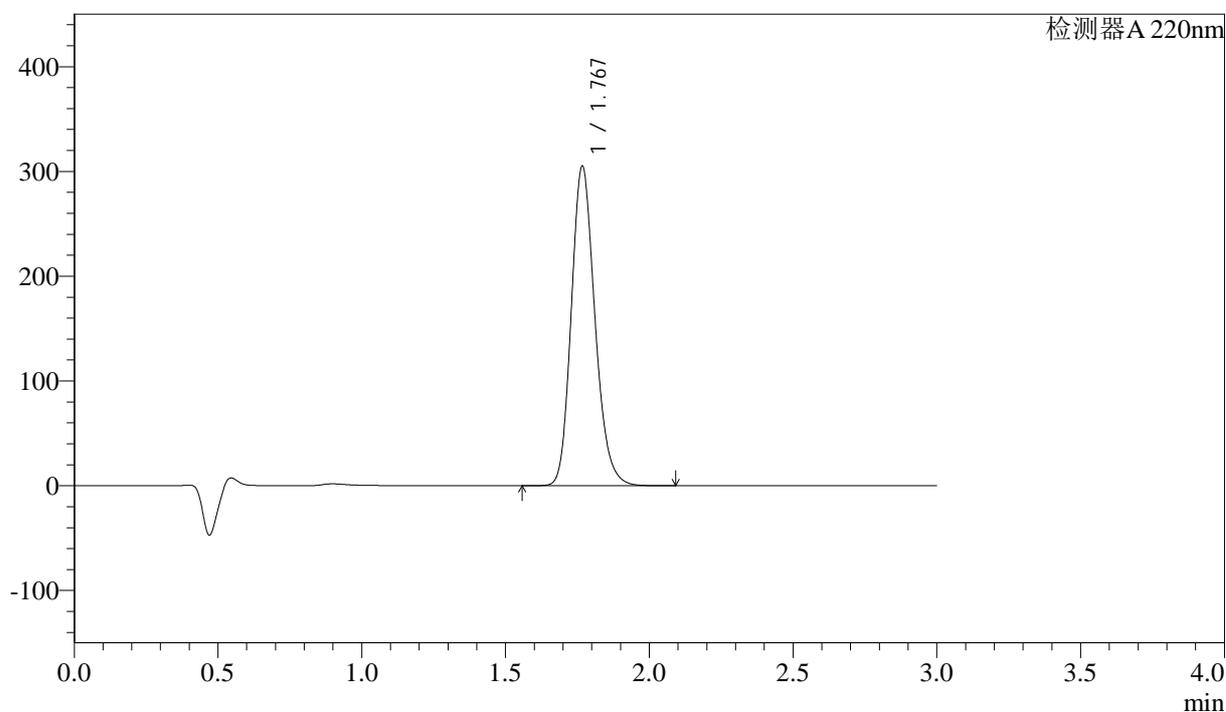

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1743996 | 303746 | 100.000 | 2254       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1743996 | 303746 | 100.000 |            |       |          |


图142 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-143-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-40  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 19:58:08 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:54 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

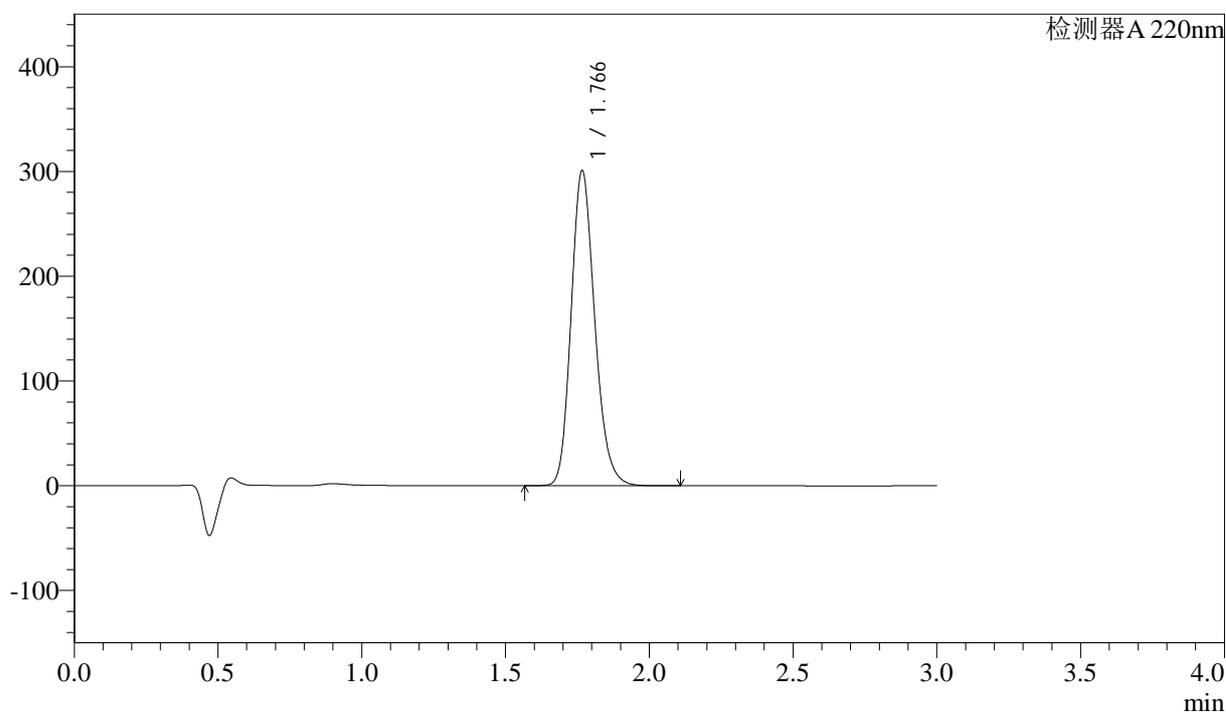

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1718129 | 299824 | 100.000 | 2257       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1718129 | 299824 | 100.000 |            |       |          |


图143 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-144-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-49  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 20:01:31 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:57 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

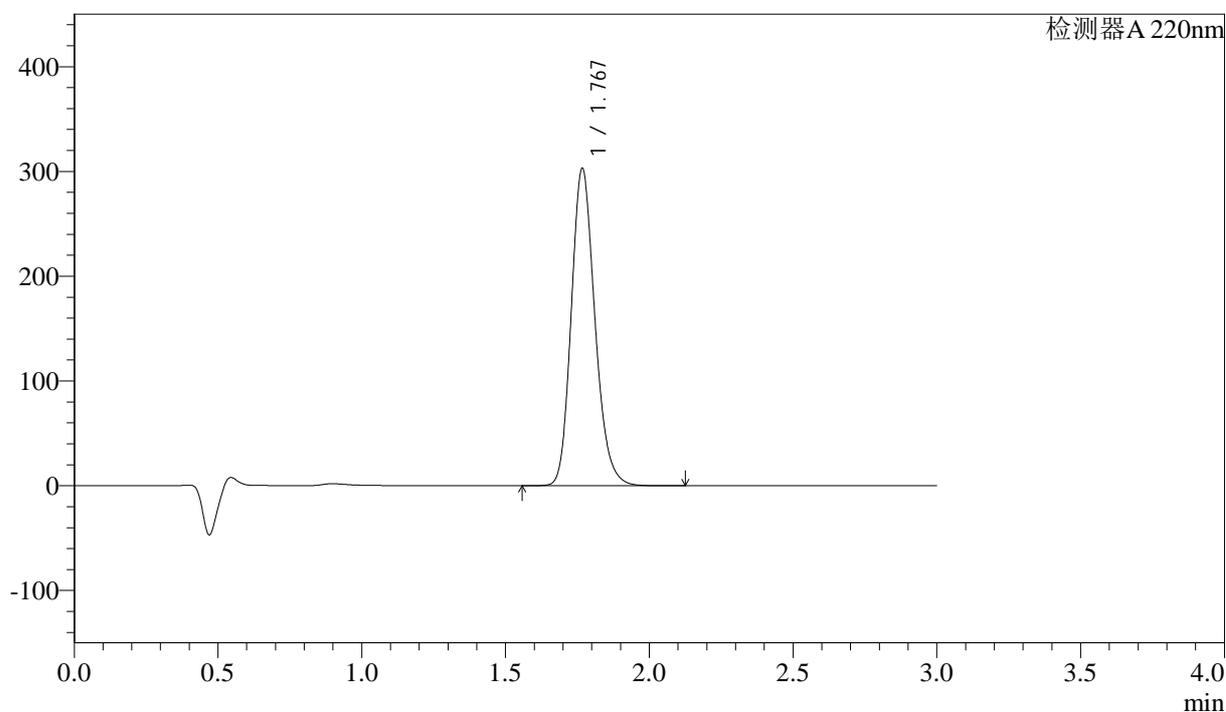

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1732379 | 301605 | 100.000 | 2252       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1732379 | 301605 | 100.000 |            |       |          |


图144 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-145-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-5  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 20:04:54 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:58:59 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

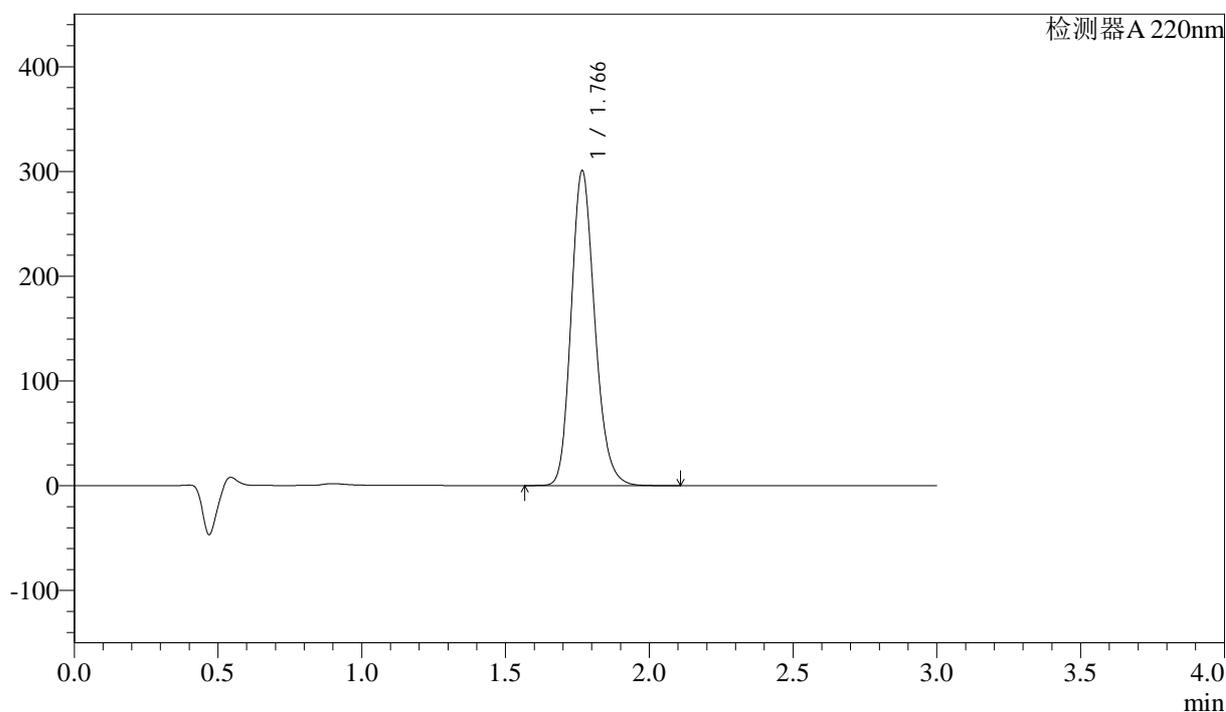

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.766 | 1716051 | 299507 | 100.000 | 2257       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1716051 | 299507 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-146-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-14  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 20:08:17 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/01 08:59:02 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

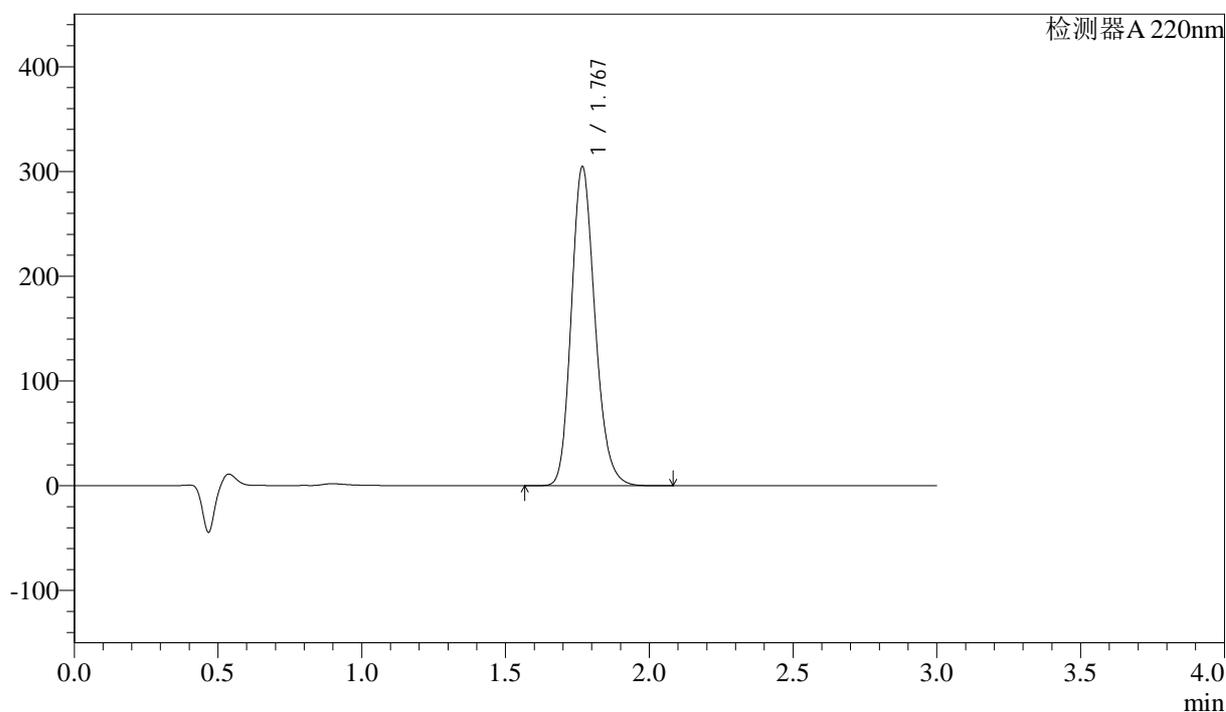

## &lt;峰表&gt;

检测器 A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1742759 | 303044 | 100.000 | 2249       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1742759 | 303044 | 100.000 |            |       |          |


图146 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-147-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-23  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 20:11:43 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:59:05 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

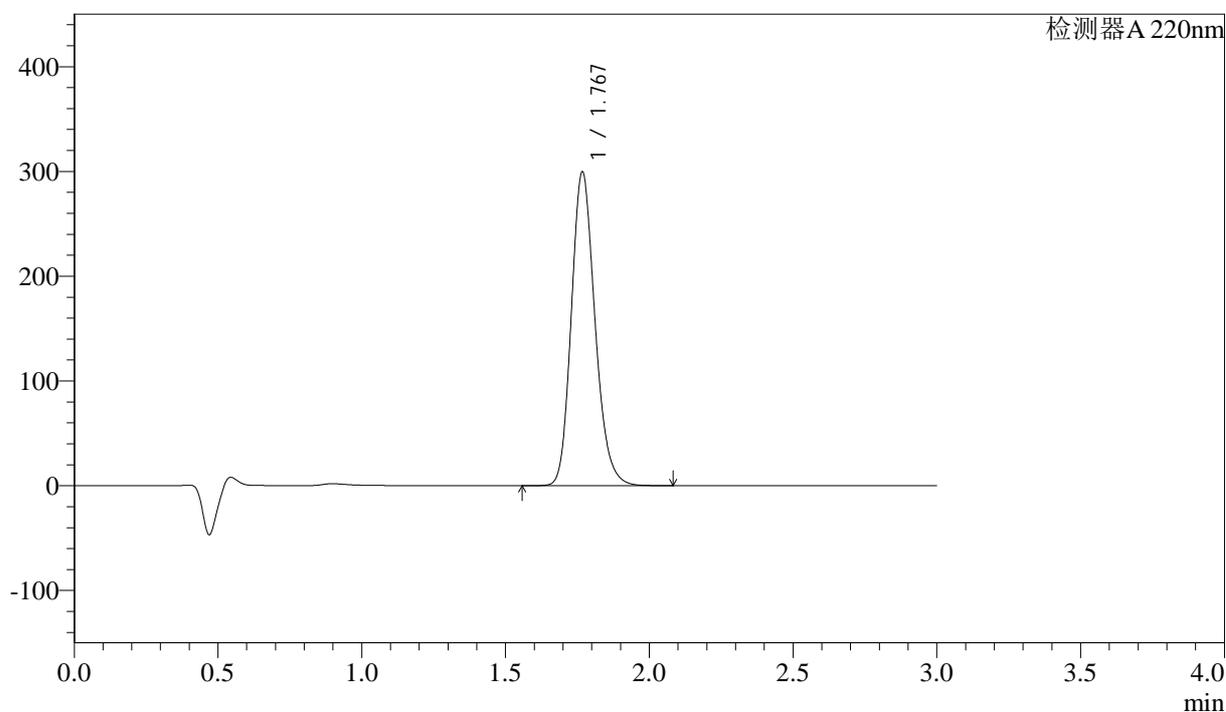

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1713456 | 298096 | 100.000 | 2251       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1713456 | 298096 | 100.000 |            |       |          |


图147 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-148-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-32  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 20:15:07 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:59:07 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

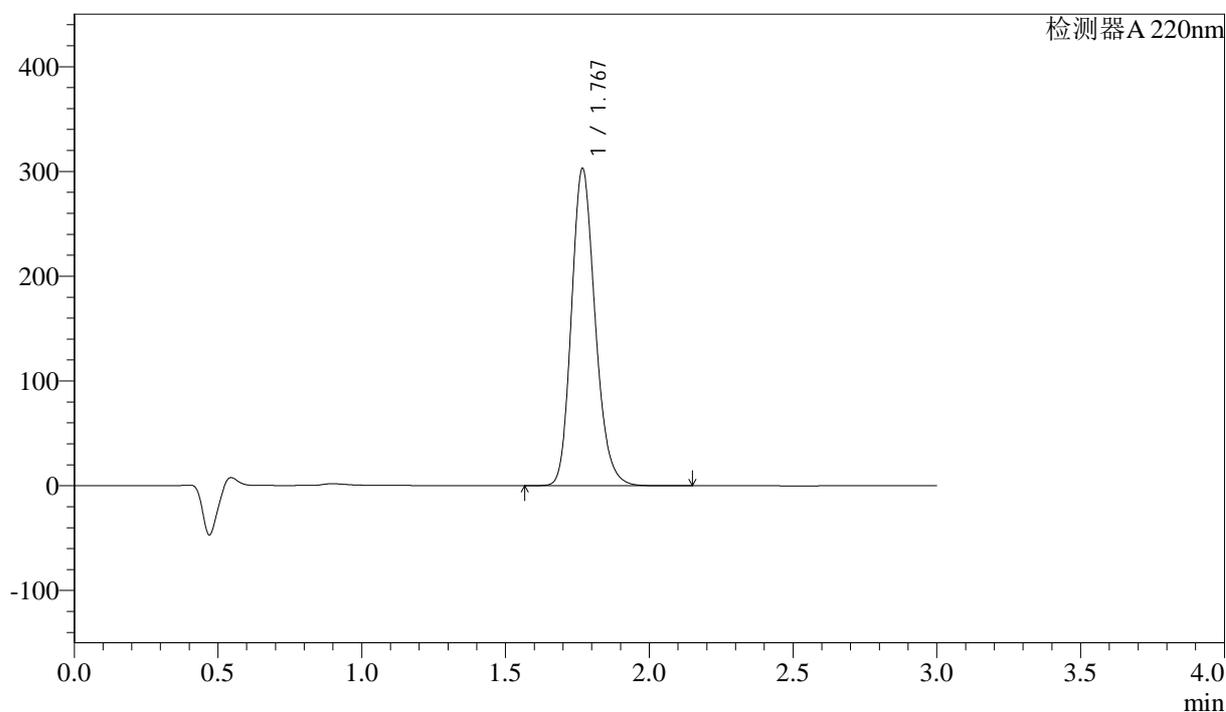

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1735149 | 300912 | 100.000 | 2246       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 1735149 | 300912 | 100.000 |            |       |          |


图148 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-149-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-41  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 20:18:31 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:59:10 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

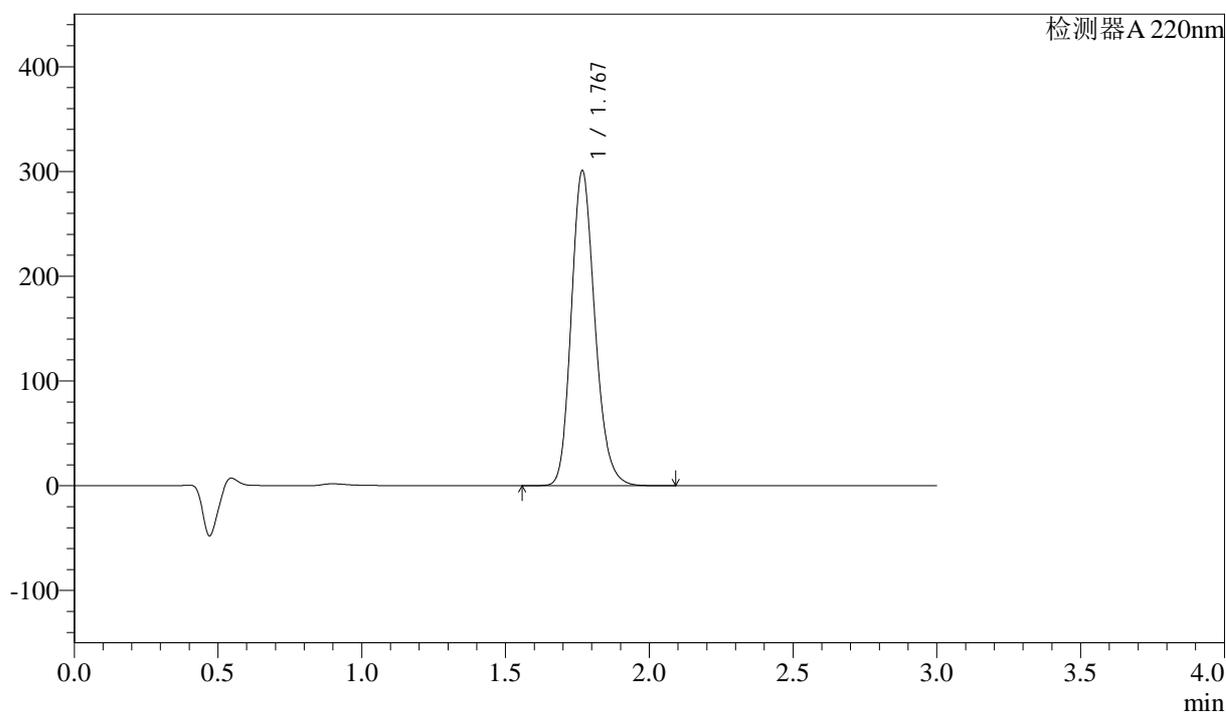

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1715612 | 299275 | 100.000 | 2261       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1715612 | 299275 | 100.000 |            |       |          |


图149 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-150-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-50  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 20:21:55 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/07/01 08:59:12 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

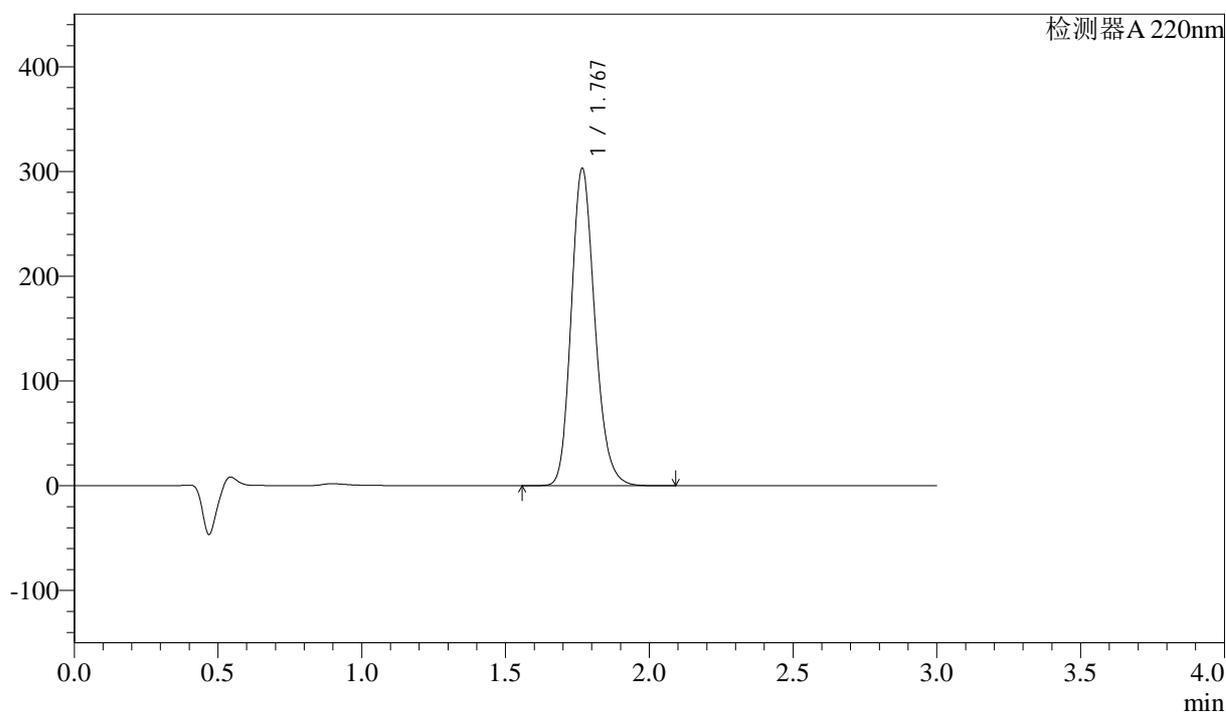

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1728384 | 301823 | 100.000 | 2263       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1728384 | 301823 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-151-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-27  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 20:25:19 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/01 08:59:15 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

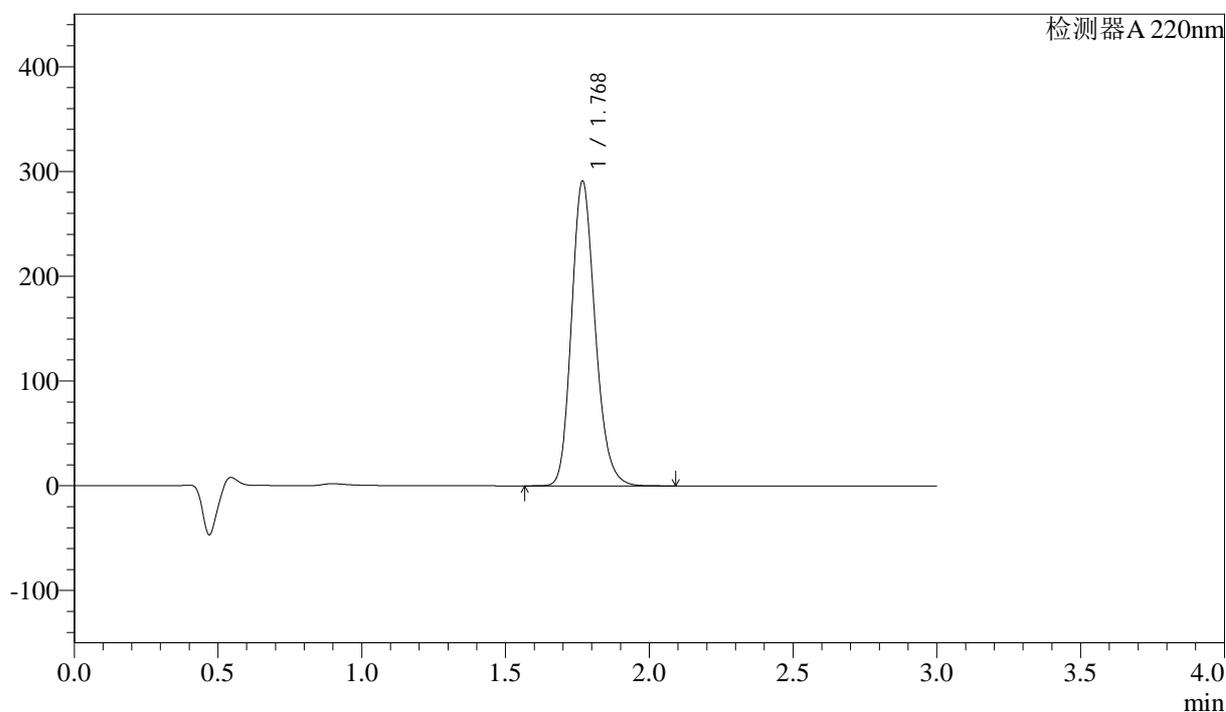

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.768 | 1663604 | 289250 | 100.000 | 2255       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 1663604 | 289250 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 220nm  
 数据文件名: RC\$QTL-390 - 0-2/25-152-2 - zzp-24062501p-60mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-390 - RCFF-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20240628-RCQX-FX274.lcb  
 样品瓶号: 4-27  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/28 20:28:44 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2): 2024/07/01 08:59:17 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV

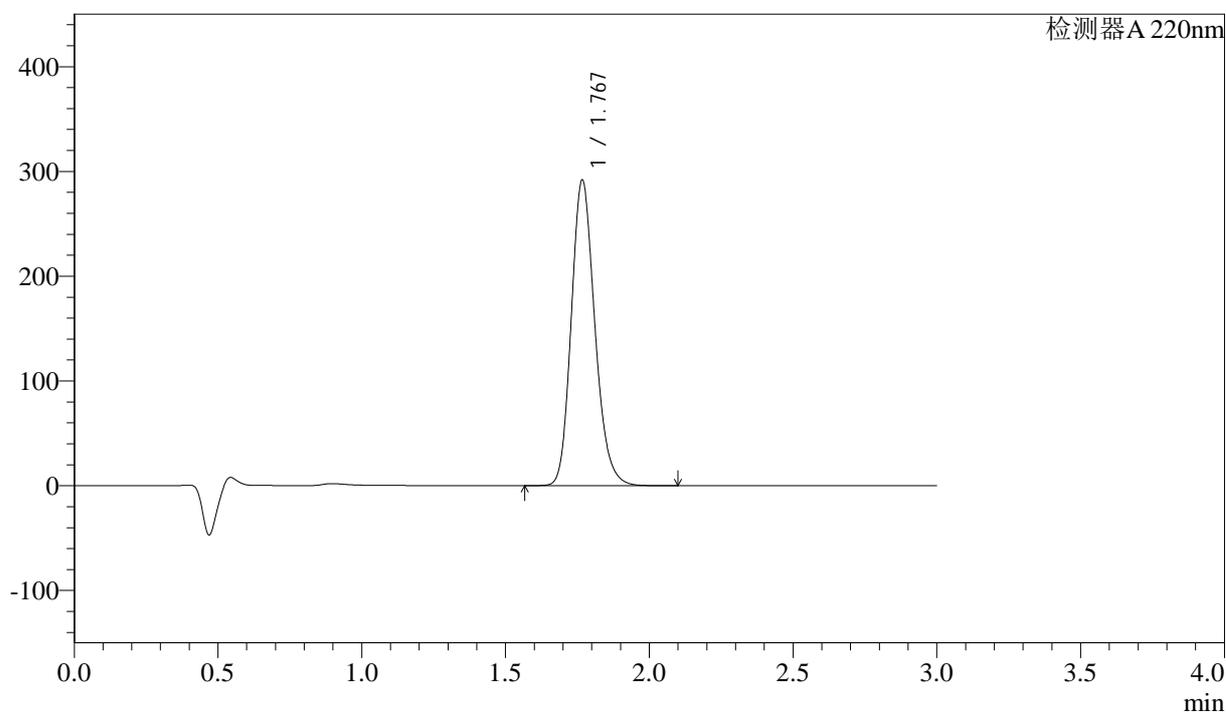

## &lt;峰表&gt;

检测器A 220nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.767 | 1662691 | 290555 | 100.000 | 2267       | 1.185 | --       |
| 总计 |       | 1662691 | 290555 | 100.000 |            |       |          |

图152 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24062501批(60mg规格)-水介质-浆法-50转  
 对照品溶液-2-2