




# Y09

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150\*4.6mm,5μm)                      流速:2.0ml/min  
 柱温 :30°C    波长:278nm  
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-191-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-rcd-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-9  
 进样体积: 10μl    版本号:6.115  
 进样时间: 2024/09/04 12:51:39                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/09/05 10:42:50                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>

mV

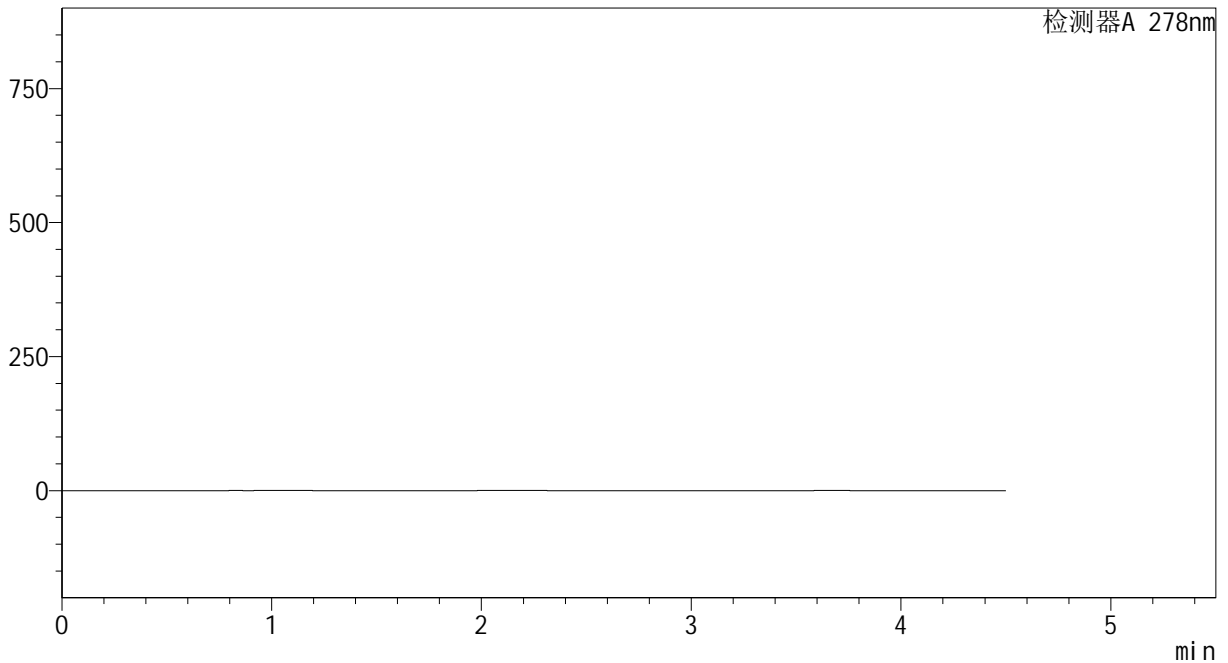

## <峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
参比制剂(100mg规格)-pH4.0介质-浆法-50转  
溶剂




# Y09

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150\*4.6mm,5μm)                      流速:2.0ml/min  
 柱温 :30°C    波长:278nm  
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-192-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-rcd-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10μl    版本号:6.115  
 进样时间: 2024/09/04 12:56:33                              实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/09/05 10:42:52                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>

mV

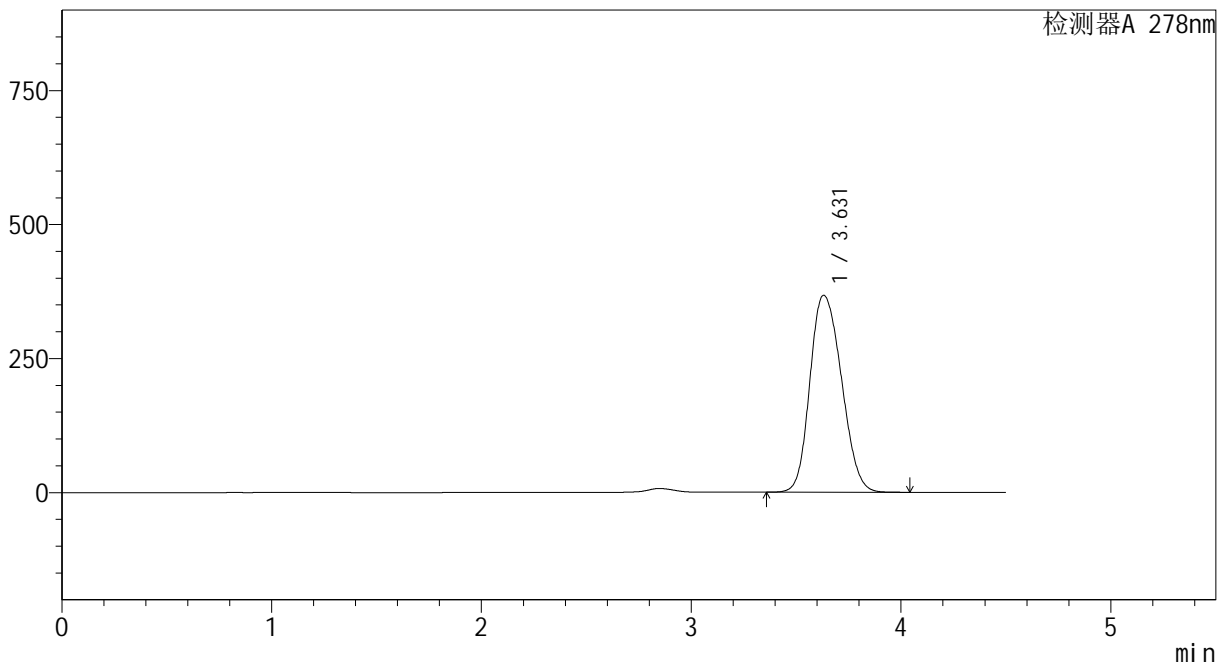

## <峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.631	3846859	100.000	367593	2832	1.184	--
总计		3846859	100.000	367593			


图2 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
 参比制剂(100mg规格)-pH4.0介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150\*4.6mm,5µm)                      流速:2.0ml/min  
 柱温 :30°C    波长:278nm  
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-193-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-rcd-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10µl    版本号:6.115  
 进样时间: 2024/09/04 13:01:26                              实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/09/05 10:42:55                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV

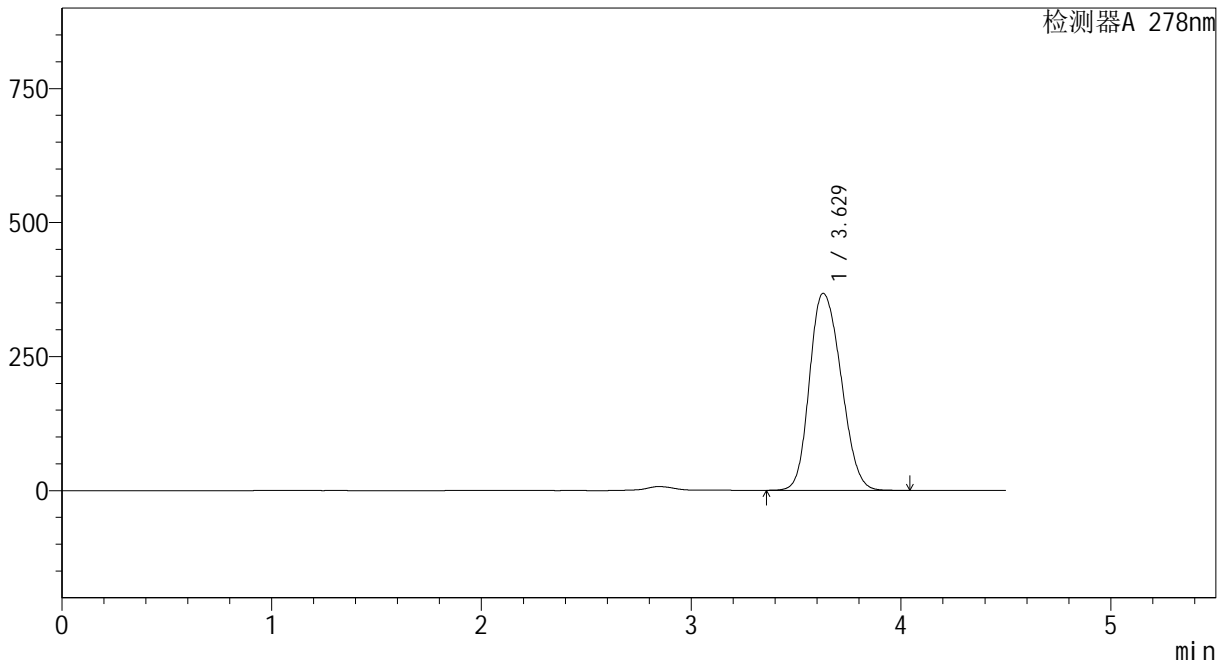

<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.629	3847283	100.000	367552	2823	1.187	--
总计		3847283	100.000	367552			


图3 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
参比制剂(100mg规格)-pH4.0介质-浆法-50转  
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150\*4.6mm,5μm)                      流速:2.0ml/min  
 柱温 :30°C    波长:278nm  
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-194-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-rcd-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10μl    版本号:6.115  
 进样时间: 2024/09/04 13:06:19                              实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/09/05 10:42:58                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV

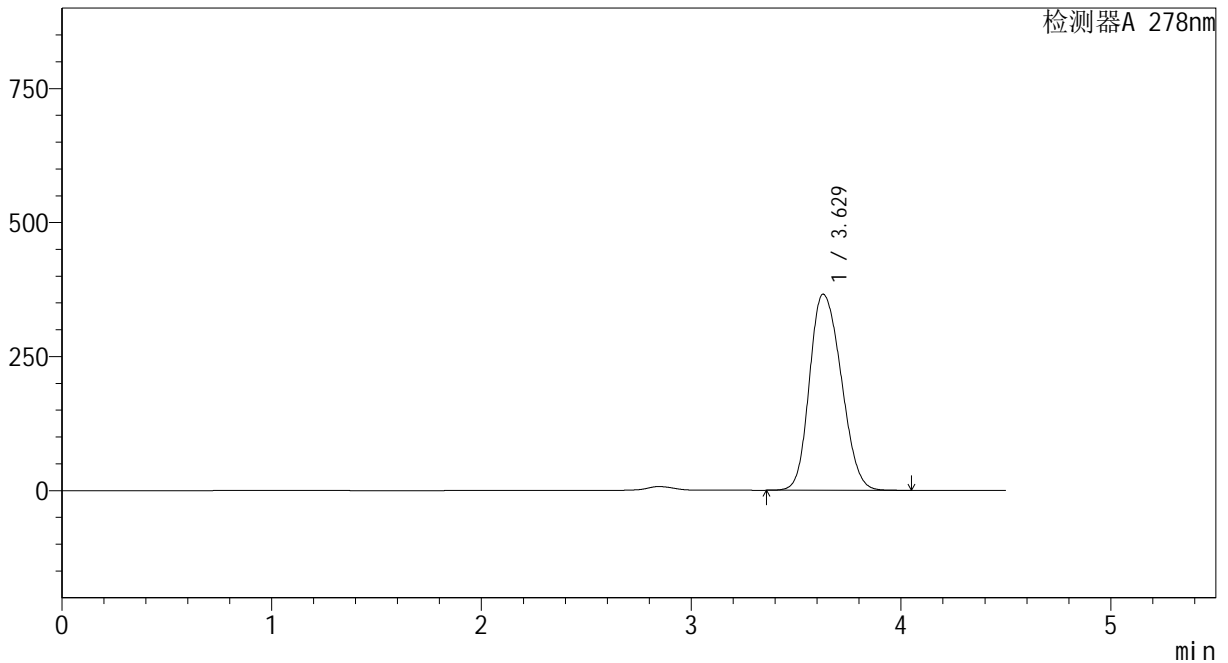

<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.629	3847350	100.000	365929	2796	1.194	--
总计		3847350	100.000	365929			

图4 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
参比制剂(100mg规格)-pH4.0介质-浆法-50转  
对照品溶液-1-3




# Y09

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150\*4.6mm,5μm)                      流速:2.0ml/min  
 柱温 :30°C    波长:278nm  
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-195-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-rcd-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10μl    版本号:6.115  
 进样时间: 2024/09/04 13:11:12                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/09/05 10:43:00                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>

mV

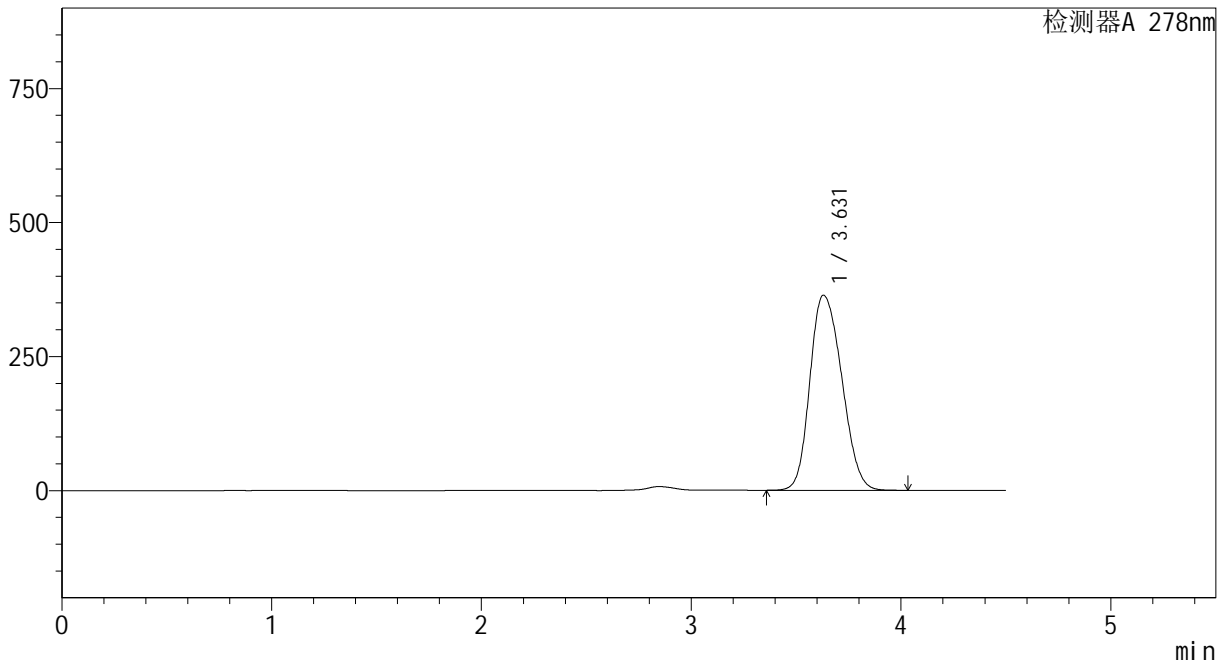

## <峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.631	3846375	100.000	364137	2769	1.199	--
总计		3846375	100.000	364137			

图5 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
 参比制剂(100mg规格)-pH4.0介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-4




# Y09

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150\*4.6mm,5μm)                      流速:2.0ml/min  
 柱温 :30°C    波长:278nm  
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-196-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-rcd-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10μl    版本号:6.115  
 进样时间: 2024/09/04 13:16:06                              实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/09/05 10:43:03                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>

mV

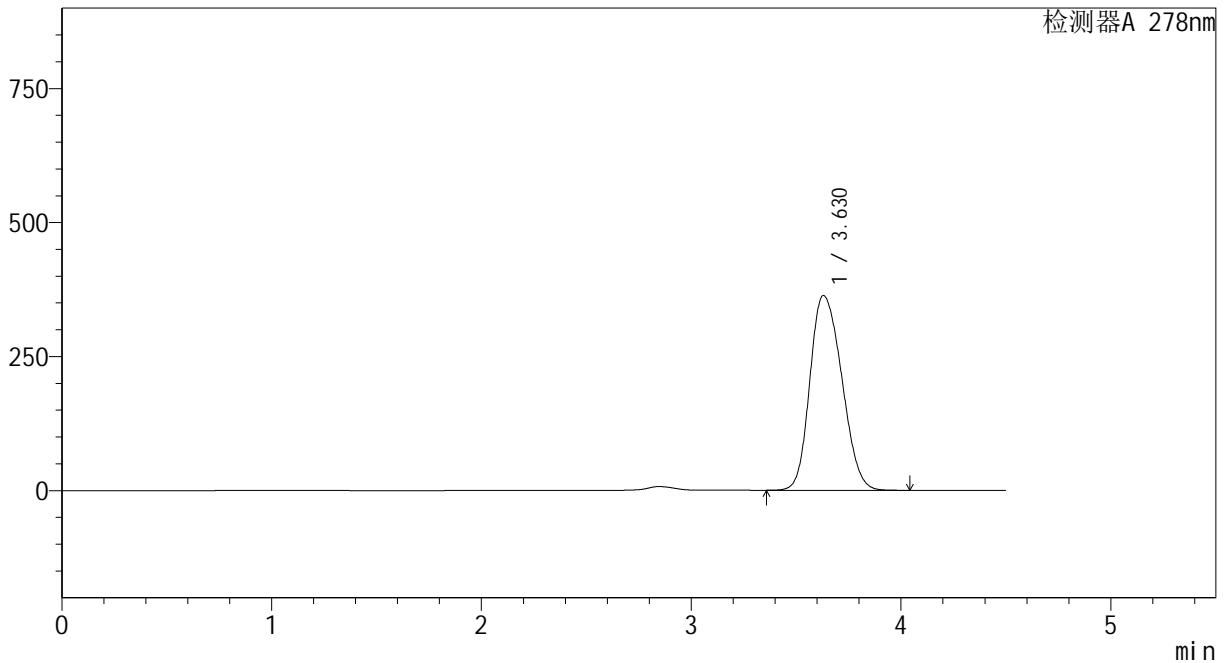

## <峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.630	3847067	100.000	363407	2753	1.204	--
总计		3847067	100.000	363407			


图6 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
 参比制剂(100mg规格)-pH4.0介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150\*4.6mm,5µm)                      流速:2.0ml/min  
 柱温 :30°C    波长:278nm  
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-197-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-p1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 10µl    版本号:6.115  
 进样时间: 2024/09/04 13:20:59                              实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/09/05 10:43:06                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV

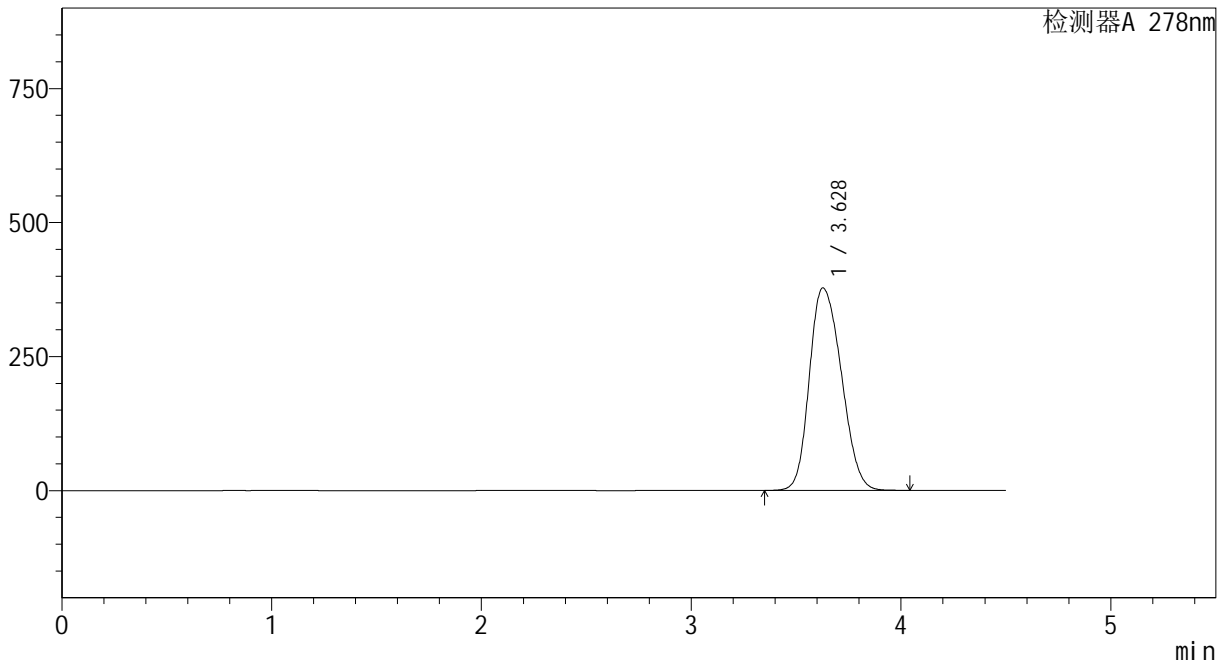

<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.628	4004744	100.000	377594	2742	1.209	--
总计		4004744	100.000	377594			


图7 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
 参比制剂(E001批)(100mg规格)-pH4.0介质-桨法-50转-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150\*4.6mm,5µm)                      流速:2.0ml/min  
 柱温 :30°C    波长:278nm  
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-198-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-p1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 10µl    版本号:6.115  
 进样时间: 2024/09/04 13:25:51                              实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/09/05 10:43:08                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV

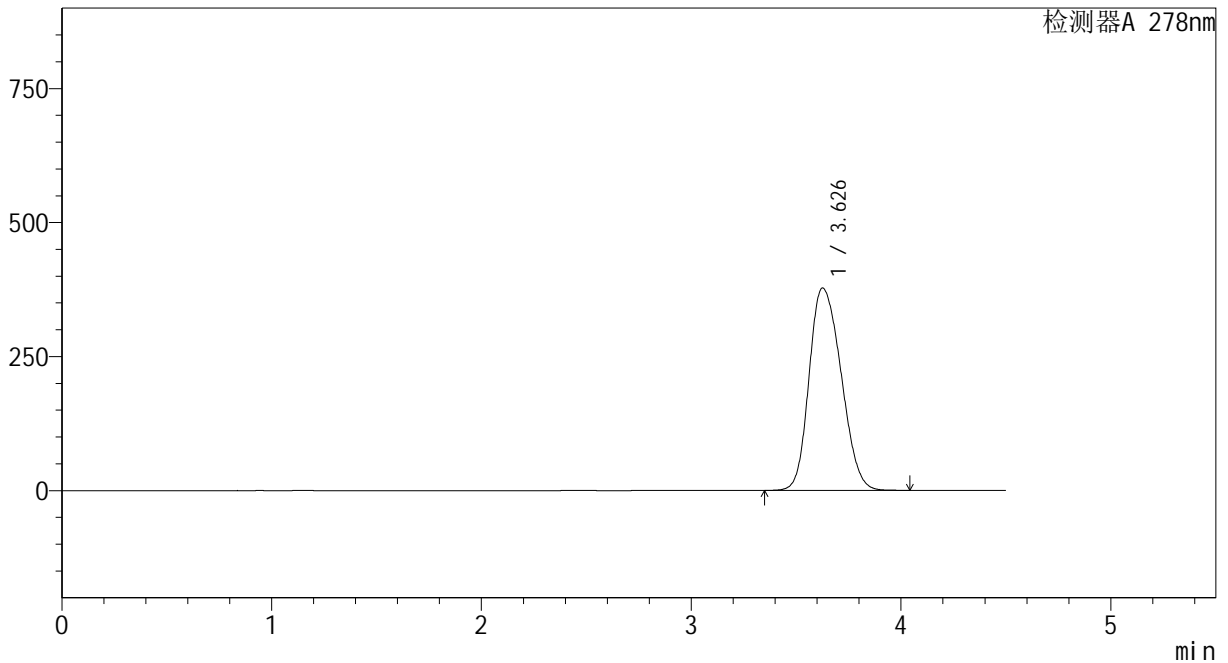

<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.626	4008961	100.000	377173	2730	1.214	--
总计		4008961	100.000	377173			

图8 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
参比制剂(E001批)(100mg规格)-pH4.0介质-桨法-50转-片1  
供试品溶液-2




# Y09

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150\*4.6mm,5μm)                      流速:2.0ml/min  
 柱温 :30°C    波长:278nm  
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-199-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-p2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 10μl    版本号:6.115  
 进样时间: 2024/09/04 13:30:43                              实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/09/05 10:43:11                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>

mV

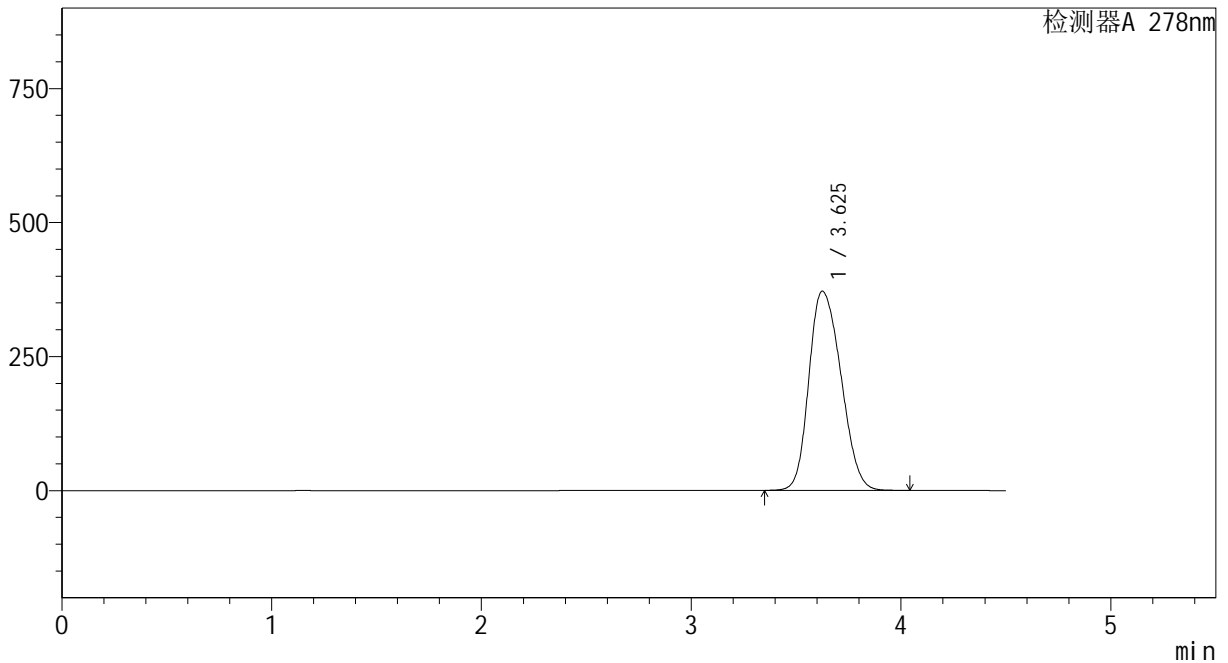

## <峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.625	3951799	100.000	371280	2714	1.217	--
总计		3951799	100.000	371280			

图9 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
 参比制剂(E001批)(100mg规格)-pH4.0介质-浆法-50转-片2  
 供试品溶液-1




# Y09

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150\*4.6mm,5μm)                      流速:2.0ml/min  
 柱温 :30°C    波长:278nm  
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-200-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-p2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 10μl    版本号:6.115  
 进样时间: 2024/09/04 13:35:35                              实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/09/05 10:43:14                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>

mV

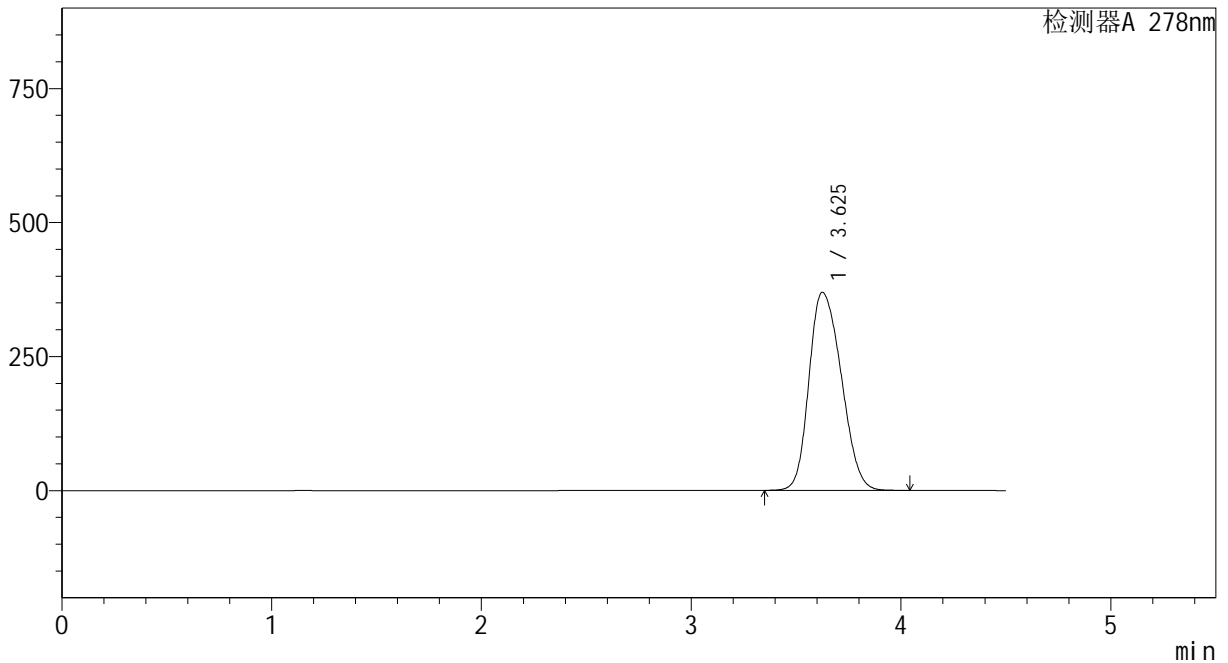

## <峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.625	3954011	100.000	369193	2677	1.225	--
总计		3954011	100.000	369193			


图10 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
 参比制剂(E001批)(100mg规格)-pH4.0介质-桨法-50转-片2  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150\*4.6mm,5µm)                      流速:2.0ml/min  
 柱温 :30°C    波长:278nm  
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-201-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-p3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 10µl    版本号:6.115  
 进样时间: 2024/09/04 13:40:27                              实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/09/05 10:43:16                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV

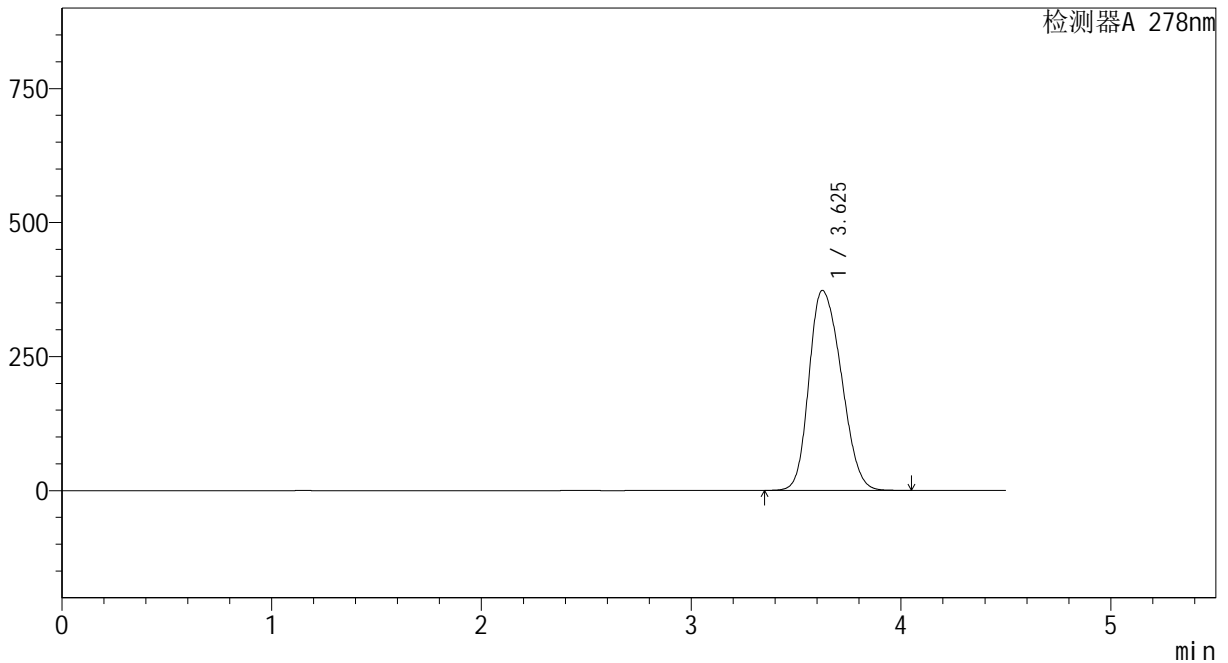

<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.625	3992456	100.000	372682	2672	1.229	--
总计		3992456	100.000	372682			


图11 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
 参比制剂(E001批)(100mg规格)-pH4.0介质-浆法-50转-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150\*4.6mm,5µm)                      流速:2.0ml/min  
 柱温 :30°C    波长:278nm  
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-202-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-p3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 10µl    版本号:6.115  
 进样时间: 2024/09/04 13:45:19                              实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/09/05 10:43:19                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV

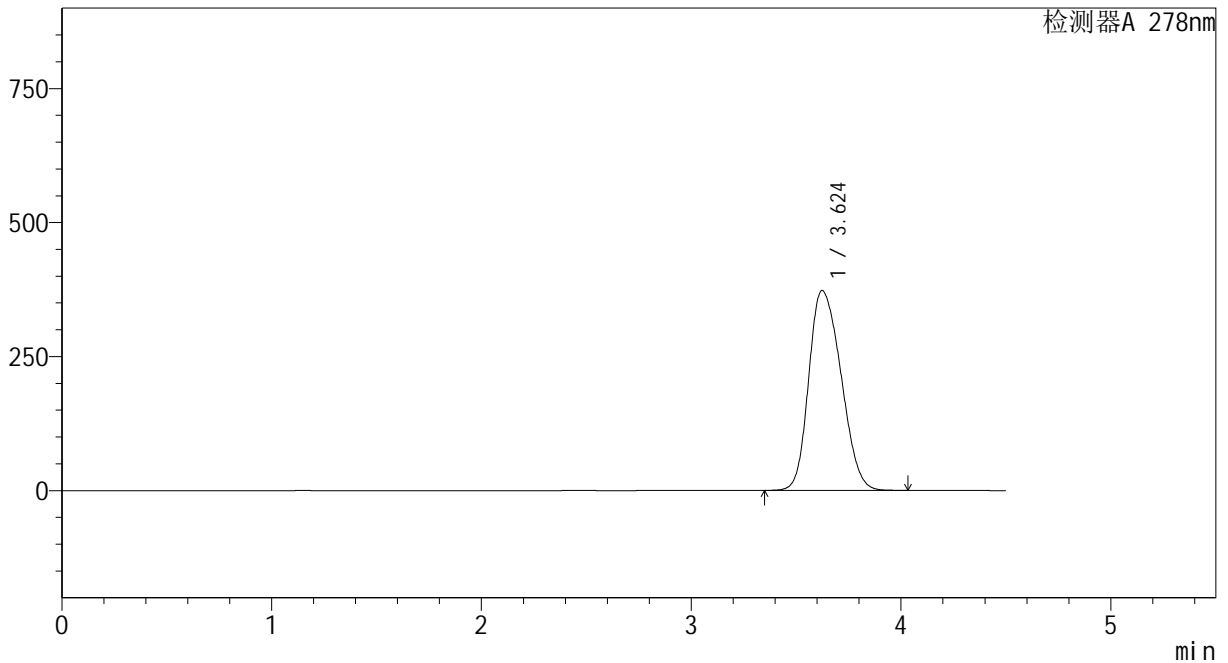

<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.624	3993299	100.000	372811	2661	1.232	--
总计		3993299	100.000	372811			


图12 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
 参比制剂(E001批)(100mg规格)-pH4.0介质-浆法-50转-片3  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5µm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-203-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-p4-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-29	版本号:6.115
进样体积: 10µl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/09/04 13:50:11	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/09/05 10:43:21	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV

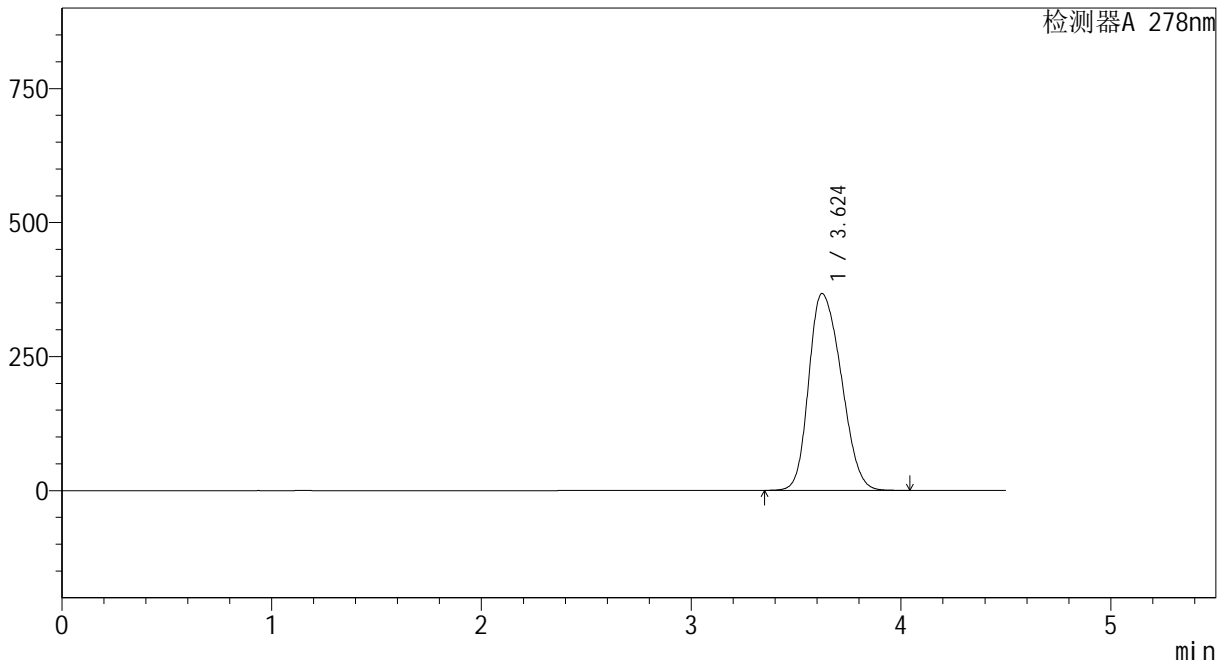

<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.624	3953390	100.000	367196	2627	1.239	--
总计		3953390	100.000	367196			


图13 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
参比制剂(E001批)(100mg规格)-pH4.0介质-桨法-50转-片4  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150\*4.6mm,5µm)                      流速:2.0ml/min  
 柱温 :30°C    波长:278nm  
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-204-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-p4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 10µl    版本号:6.115  
 进样时间: 2024/09/04 13:55:02                              实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/09/05 10:43:24                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV

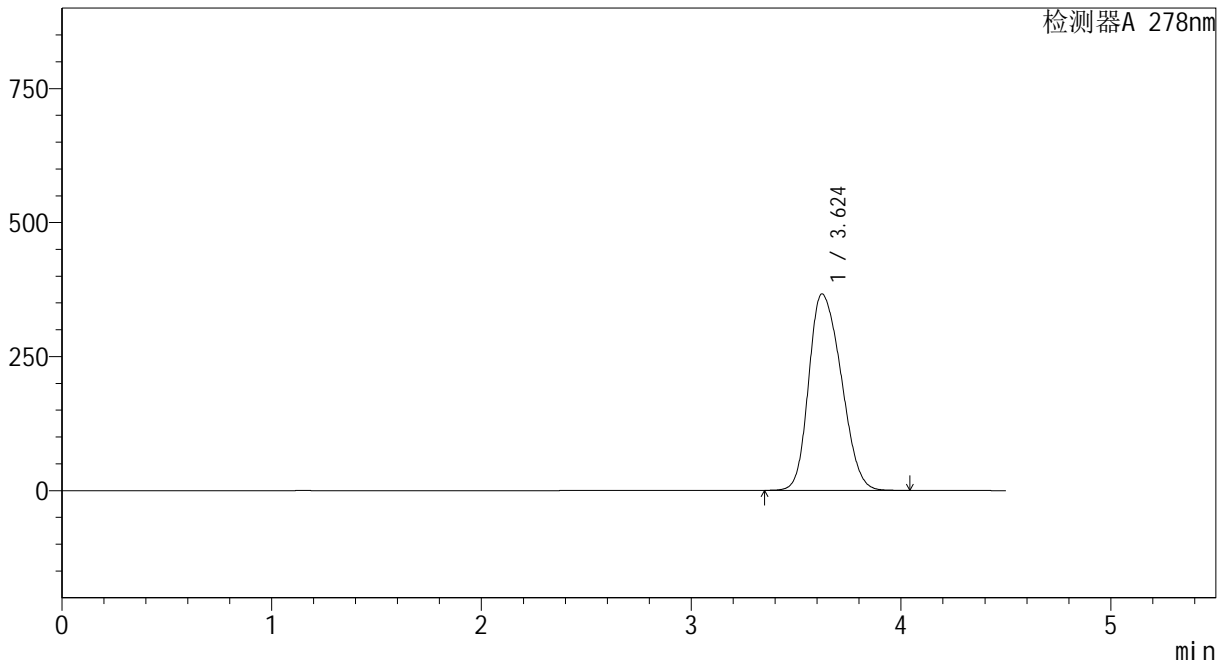

<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.624	3946530	100.000	366469	2620	1.242	--
总计		3946530	100.000	366469			

图14 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
参比制剂(E001批)(100mg规格)-pH4.0介质-桨法-50转-片4  
供试品溶液-2




# Y09

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温 :30°C      波长:278nm  
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-205-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-p5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 10μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2024/09/04 13:59:54      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/09/05 10:43:27      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>

mV

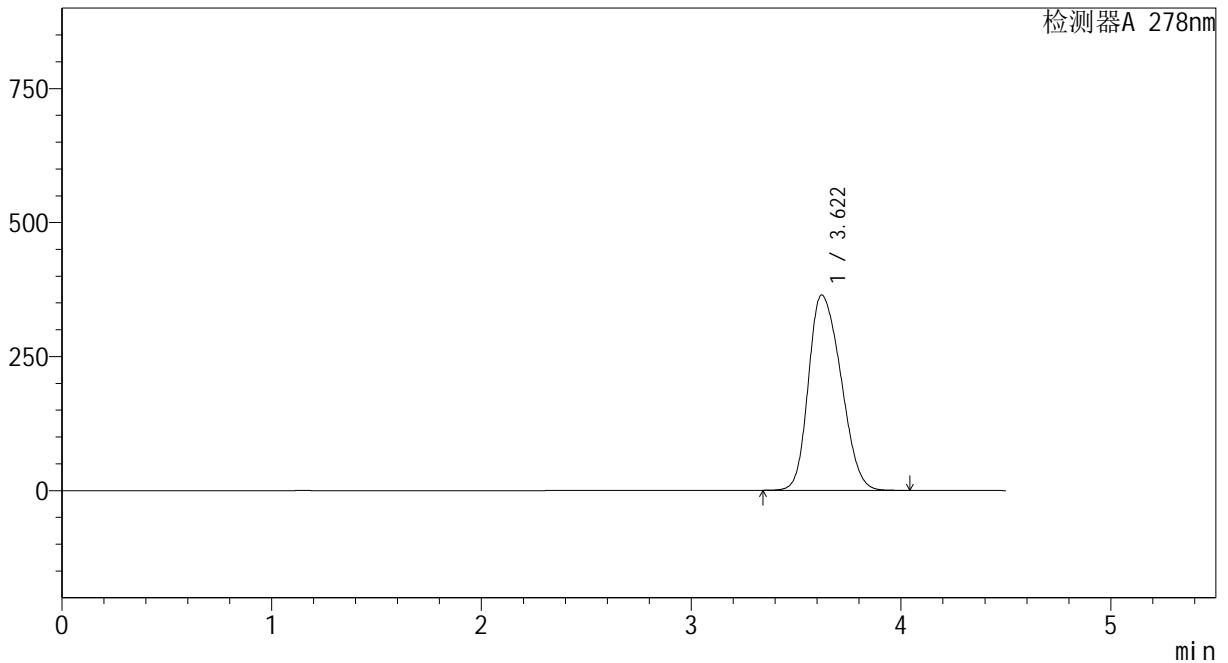

## <峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.622	3926139	100.000	364518	2610	1.244	--
总计		3926139	100.000	364518			

图15 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
 参比制剂(E001批)(100mg规格)-pH4.0介质-桨法-50转-片5  
 供试品溶液-1




# Y09

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150\*4.6mm,5μm)                      流速:2.0ml/min  
 柱温 :30°C    波长:278nm  
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-206-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-p5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 10μl    版本号:6.115  
 进样时间: 2024/09/04 14:04:46                              实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/09/05 10:43:30                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>

mV

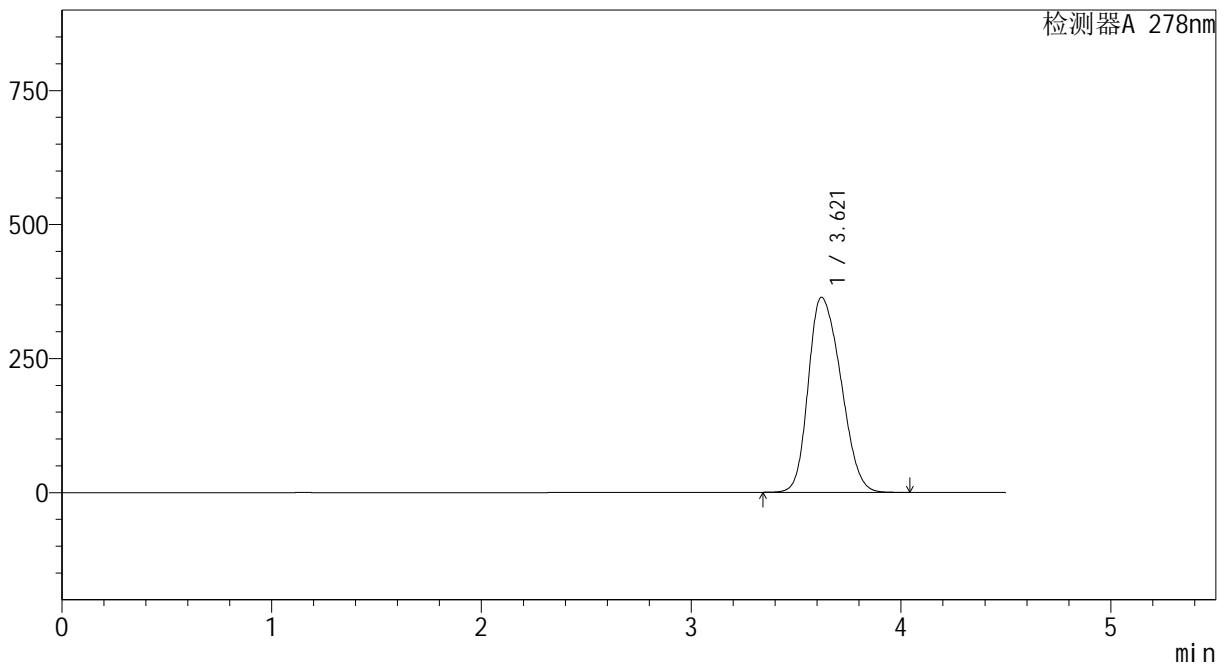

## <峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.621	3926860	100.000	363925	2596	1.248	--
总计		3926860	100.000	363925			


图16 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
 参比制剂(E001批)(100mg规格)-pH4.0介质-桨法-50转-片5  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-207-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-p6-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-47	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/09/04 14:09:37	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/09/05 10:43:32	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV

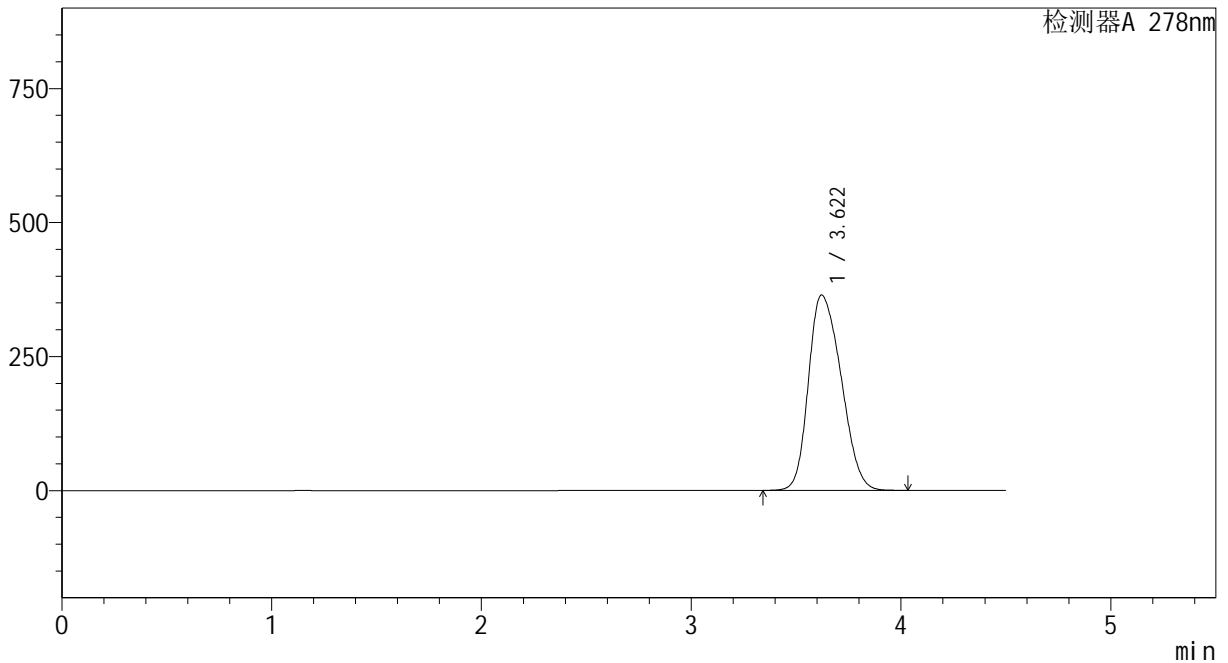

<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.622	3946086	100.000	364601	2573	1.255	--
总计		3946086	100.000	364601			

图17 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
参比制剂(E001批)(100mg规格)-pH4.0介质-桨法-50转-片6  
供试品溶液-1




# Y09

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150\*4.6mm,5μm)                      流速:2.0ml/min  
 柱温 :30°C    波长:278nm  
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-208-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-p6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 10μl    版本号:6.115  
 进样时间: 2024/09/04 14:14:29                              实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/09/05 10:43:35                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>

mV

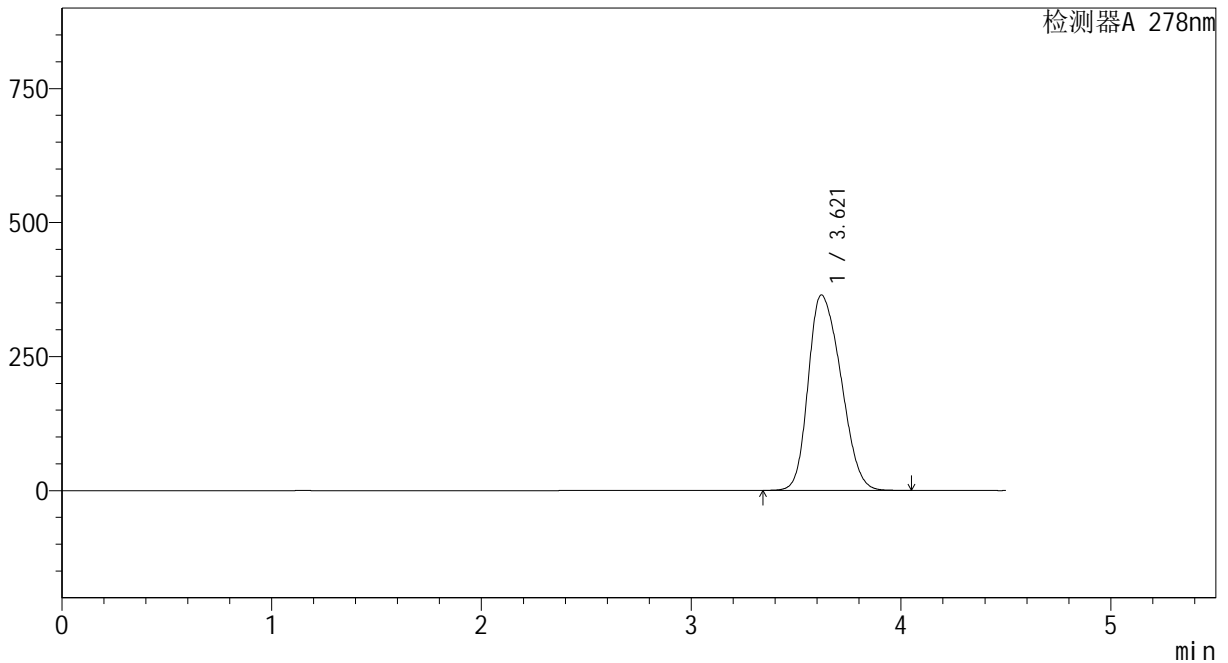

## <峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.621	3948447	100.000	364676	2566	1.258	--
总计		3948447	100.000	364676			


图18 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
 参比制剂(E001批)(100mg规格)-pH4.0介质-桨法-50转-片6  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150\*4.6mm,5µm)                      流速:2.0ml/min  
 柱温 :30°C    波长:278nm  
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-209-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-rcd-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 10µl    版本号:6.115  
 进样时间: 2024/09/04 14:19:21                              实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/09/05 10:43:38                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV

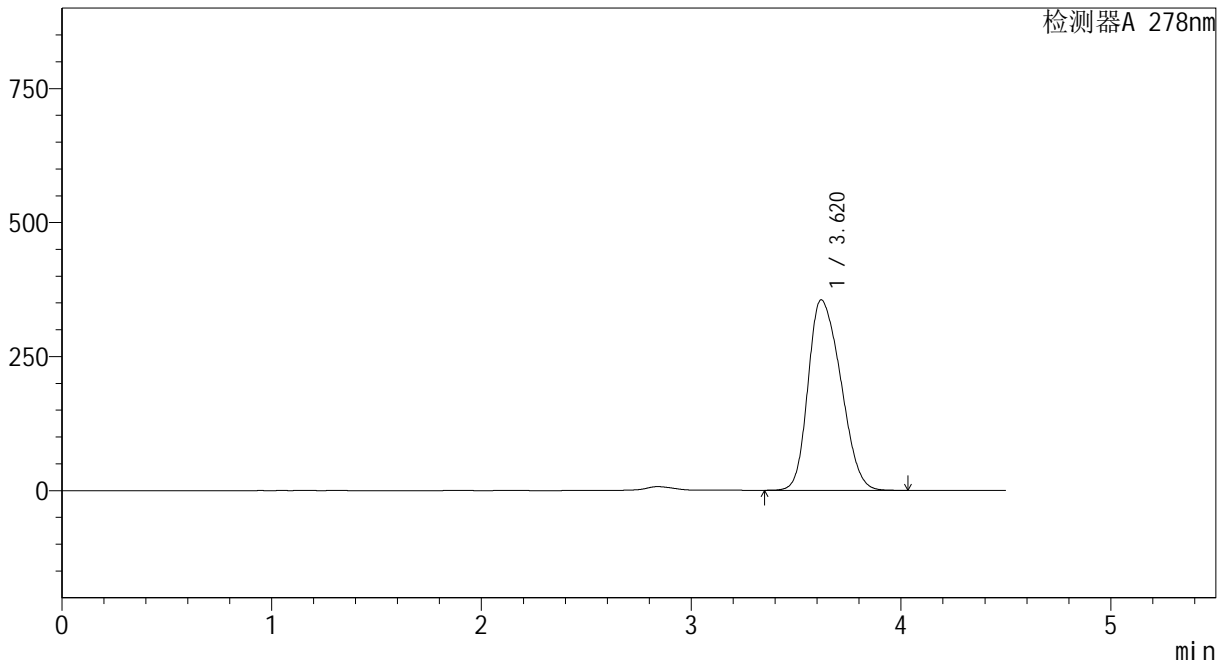

<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.620	3848265	100.000	355323	2556	1.262	--
总计		3848265	100.000	355323			


图19 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
参比制剂(100mg规格)-pH4.0介质-浆法-50转  
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150\*4.6mm,5µm)                      流速:2.0ml/min  
 柱温 :30°C    波长:278nm  
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-147/24-210-2 - cbzj-E001p-rcd-jf50z-pH4.0jz-100mg-rcd-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240904-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 10µl    版本号:6.115  
 进样时间: 2024/09/04 14:24:14                              实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/09/05 10:43:40                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV

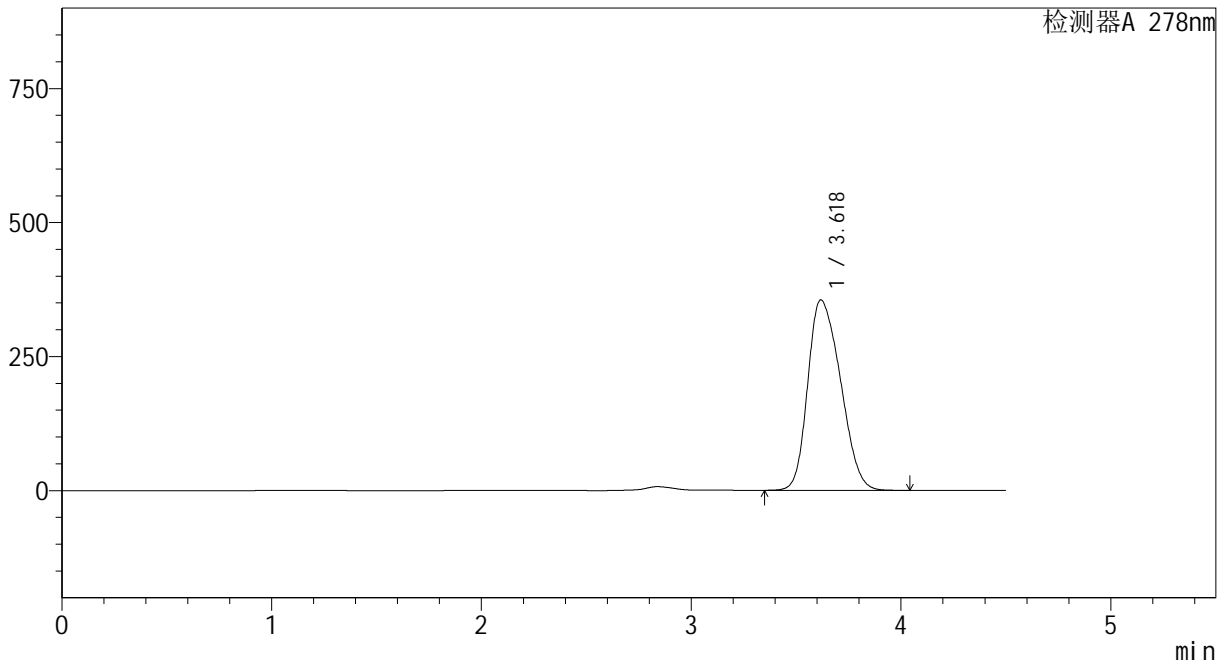

<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.618	3853446	100.000	354836	2537	1.268	--
总计		3853446	100.000	354836			

图20 诺氟沙星胶囊溶出度测定HPLC图谱  
参比制剂(100mg规格)-pH4.0介质-浆法-50转  
对照品溶液-2-2