


<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-4029 - 0-194/23-984-3 - rcd-cq9y-80mg5mg-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-4029 - RC-rcqx-FX272.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-4029 - 20240923-rcqx-FX272.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μL	实验者	: wangdan
进样时间	: 2024/09/23 17:23:10	处理者	: wangdan
处理时间(V3)	: 2024/09/24 14:52:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX272)		

<色谱图>

mV

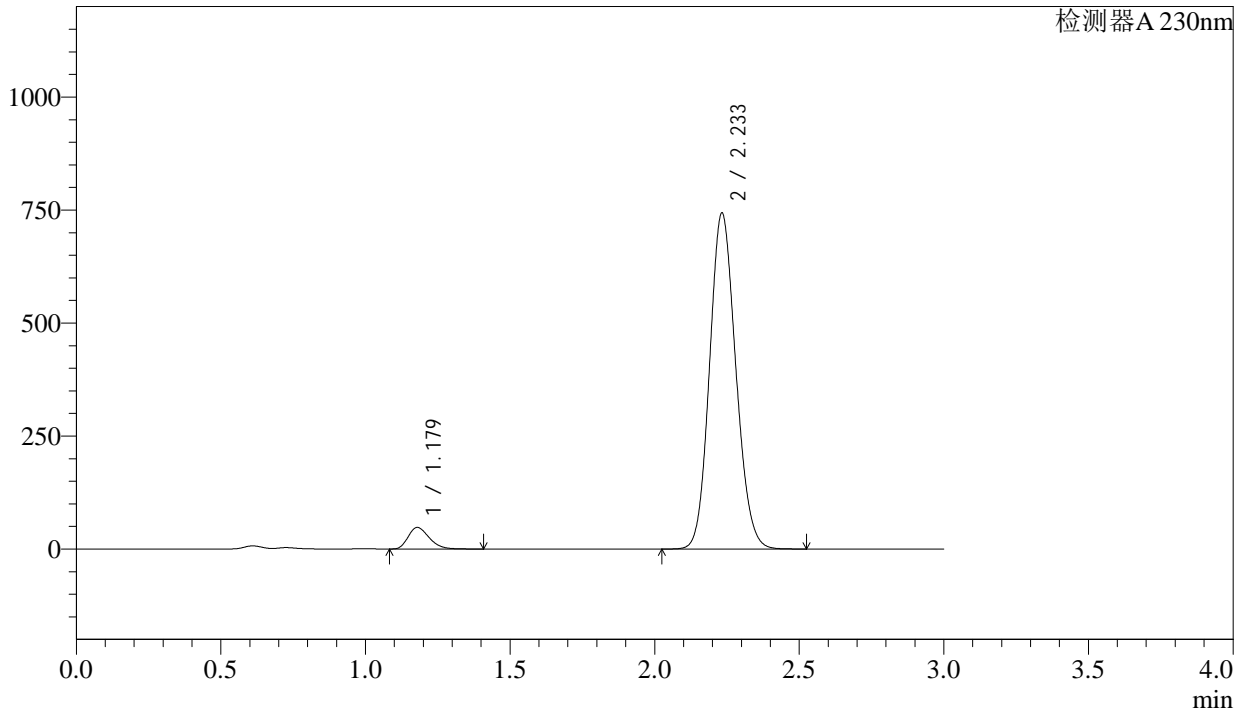

<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	241065	4.885	47718	1264	1.288	--
2	2.233	4693893	95.115	741795	2880	1.124	7.045
总计		4934957	100.000	789513			

图6 苯磺酸氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期9月HPLC图谱
参比制剂(80mg/5mg规格)-含0.1%吐温20的pH6.8磷酸盐溶液介质-桨法-65转
对照品溶液-1-5




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-4029 - 0-195/23-985-3 - cbzj-BDJL7p-rcd-cq9y-80mg5mg-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-4029 - RC-rcqx-FX272.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-4029 - 20240923-rcqx-FX272.lcb		
样品瓶号	: 3-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μL	实验者	: wangdan
进样时间	: 2024/09/23 17:26:32	处理者	: wangdan
处理时间(V3)	: 2024/09/24 14:53:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX272)		

<色谱图>

mV

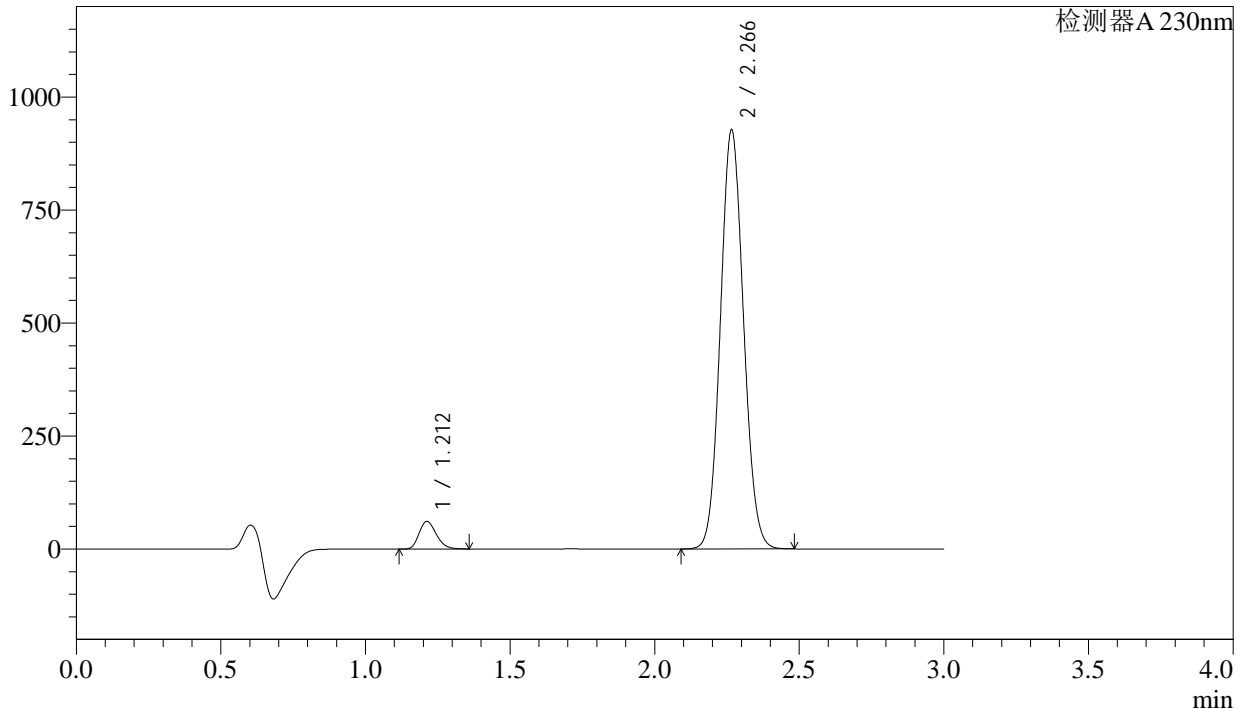

<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.212	253408	4.687	60976	1954	1.219	--
2	2.266	5153638	95.313	924306	3820	1.080	8.219
总计		5407046	100.000	985281			


图7 苯磺酸氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期9月HPLC图谱
 参比制剂(BDJL7批)(80mg/5mg规格)-含0.1%吐温20的pH6.8磷酸盐溶液介质-
 浆法-65转-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 230nm
数据文件名	: RC\$SMF-4029 - 0-196/23-989-3 - cbzj-BDJL7p-rcd-cq9y-80mg5mg-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-4029 - RC-rcqx-FX272.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-4029 - 20240923-rcqx-FX272.lcb		
样品瓶号	: 3-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μL	实验者	: wangdan
进样时间	: 2024/09/23 17:40:03	处理者	: wangdan
处理时间(V3)	: 2024/09/24 14:54:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX272)		

<色谱图>

mV

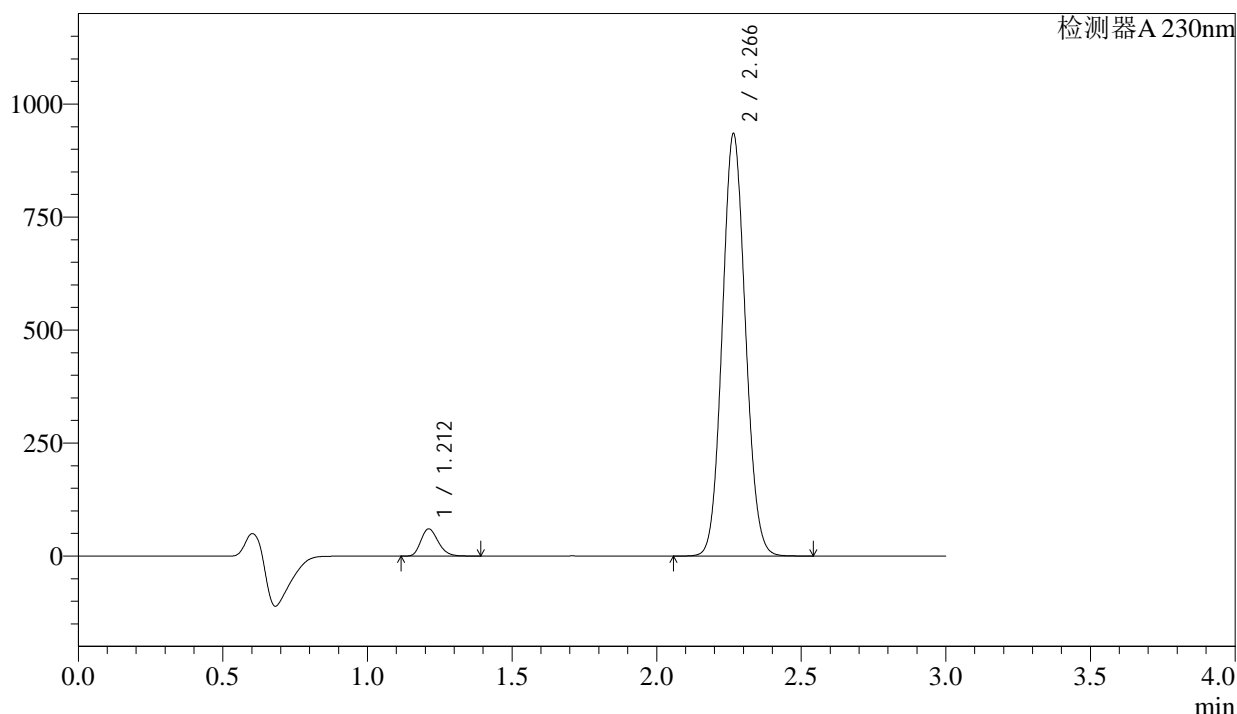

<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.212	250658	4.602	60068	1948	1.223	--
2	2.266	5196429	95.398	932480	3821	1.081	8.219
总计		5447087	100.000	992548			


图11 苯磺酸氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期9月HPLC图谱
参比制剂(BDJL7批)(80mg/5mg规格)-含0.1%吐温20的pH6.8磷酸盐溶液介质-
浆法-65转-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-196/23-992-3 - cbzj-BDJL7p-rcd-cq9y-80mg5mg-P4-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RC-rcqx-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240923-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号 : 3-28
 进样体积 : 20 μ L 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/09/23 17:50:11 实验者: wangdan
 处理时间(V3) : 2024/09/24 14:54:41 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX272)

<色谱图>

mV

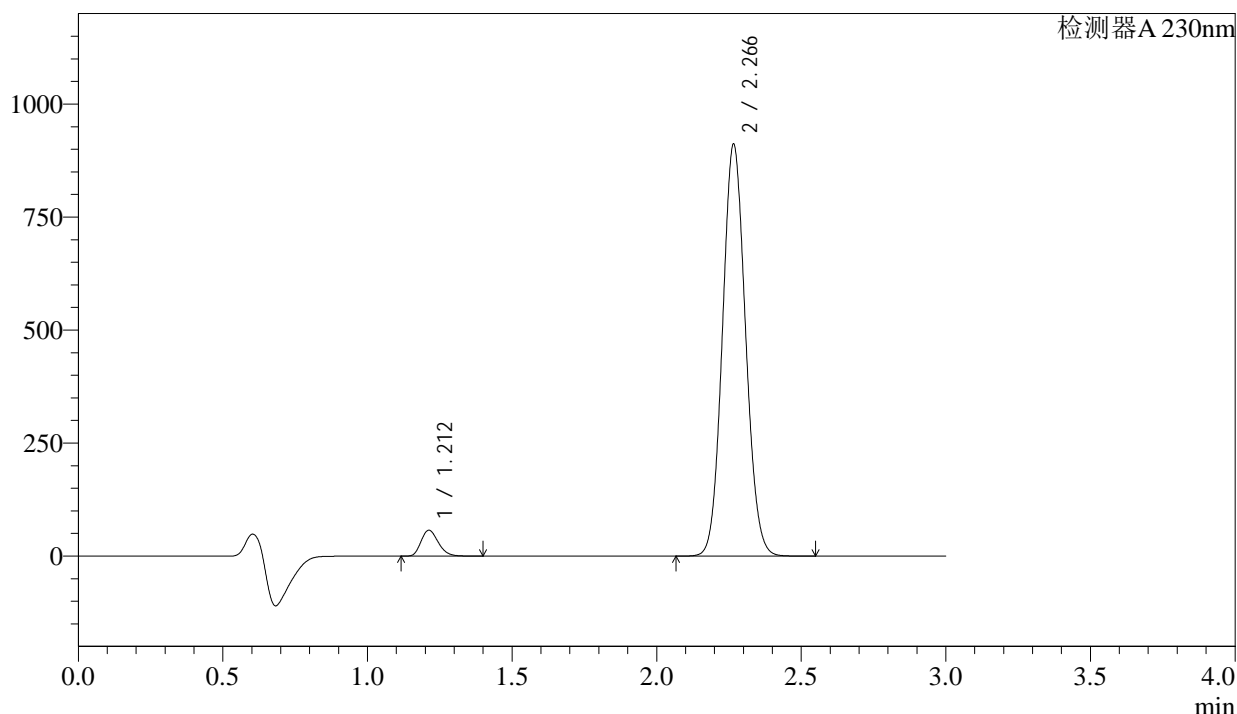

<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.212	238473	4.498	57166	1949	1.223	--
2	2.266	5063688	95.502	908574	3828	1.081	8.223
总计		5302161	100.000	965740			

图14 苯磺酸氨氯地平缬沙坦片溶出度测定长期9月HPLC图谱
 参比制剂(BDJL7批)(80mg/5mg规格)-含0.1%吐温20的pH6.8磷酸盐溶液介质-
 浆法-65转-片4
 供试品溶液-2

