


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-231-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 15:46:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:39:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

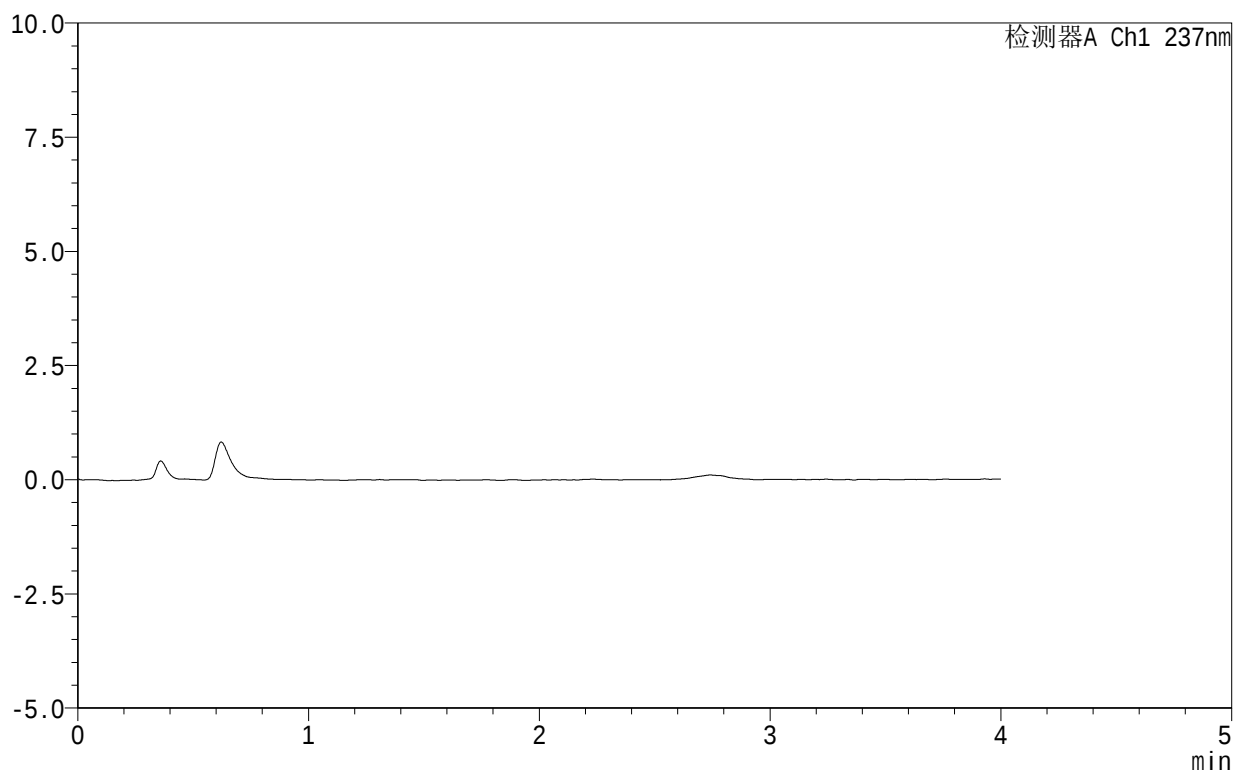

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-232-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 15:51:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:39:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

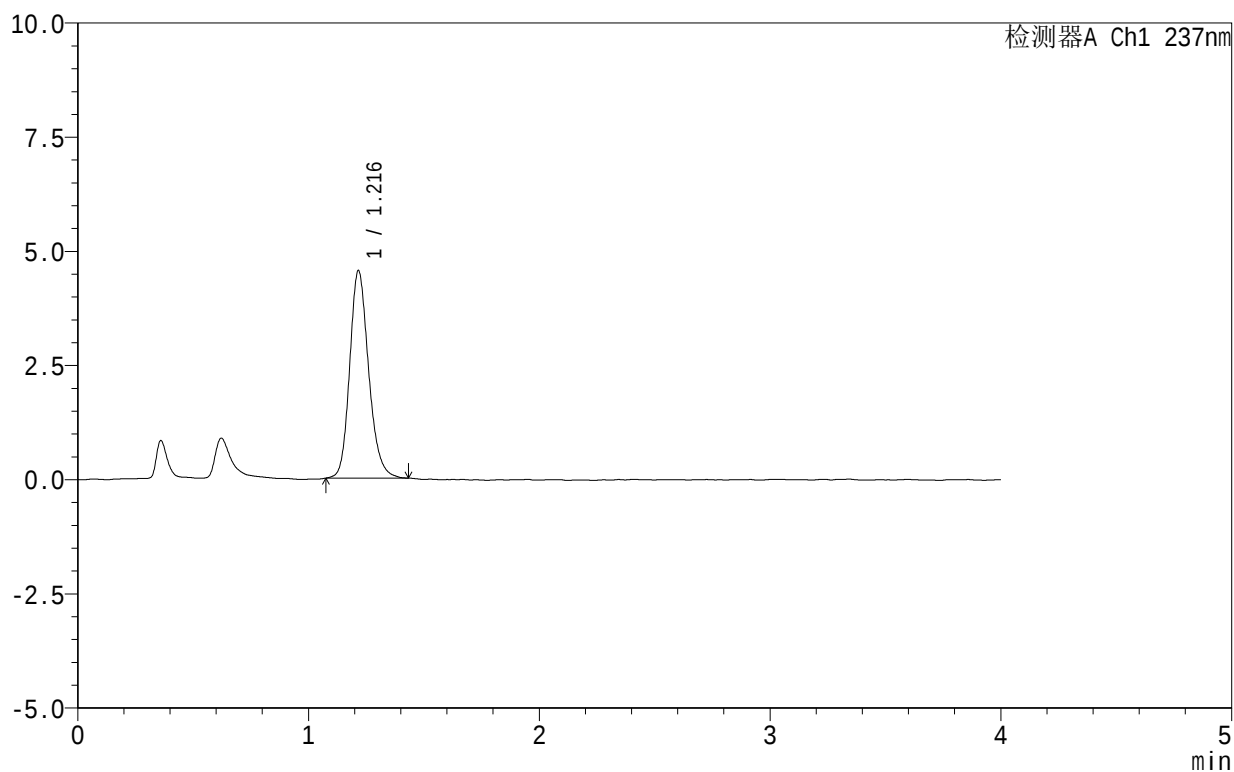

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.216	25930	100.000	4531	1092	1.192	--
总计		25930	100.000	4531			


图2 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-233-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 15:55:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:39:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

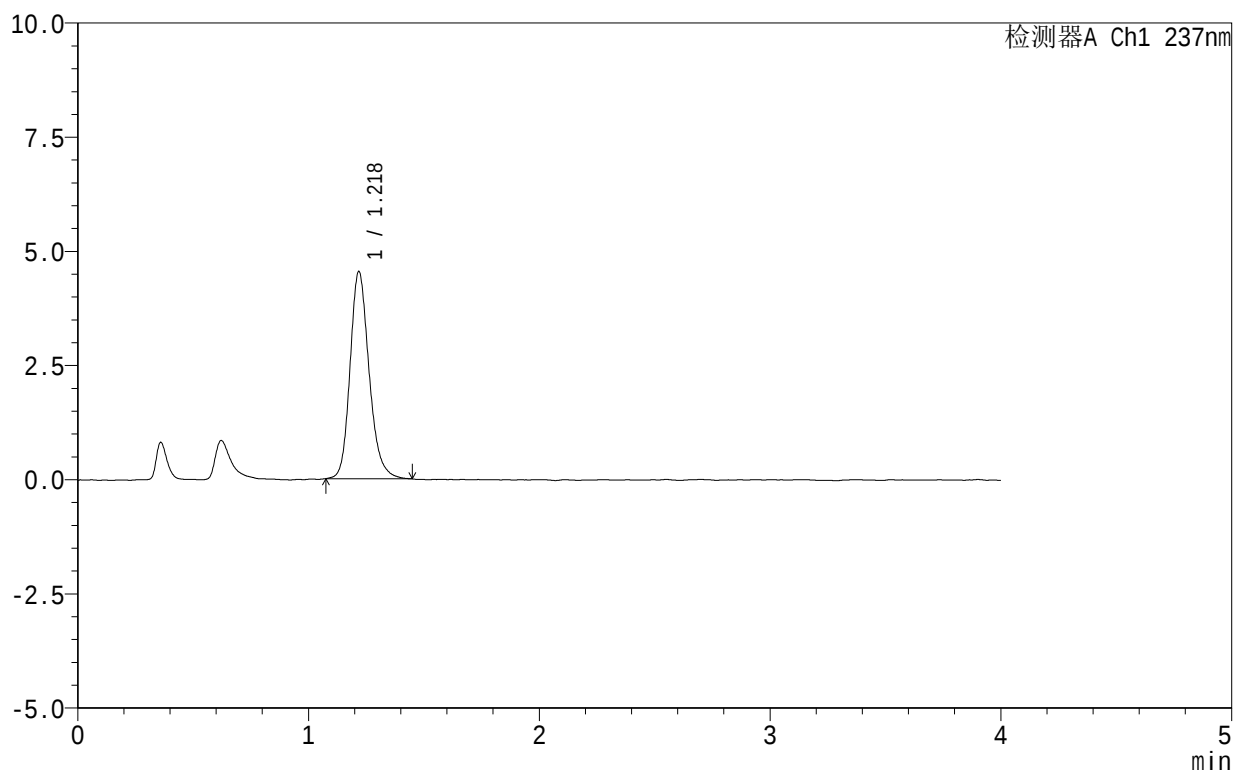

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	26003	100.000	4515	1090	1.206	--
总计		26003	100.000	4515			

图3 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-2




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-234-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:00:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:39:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

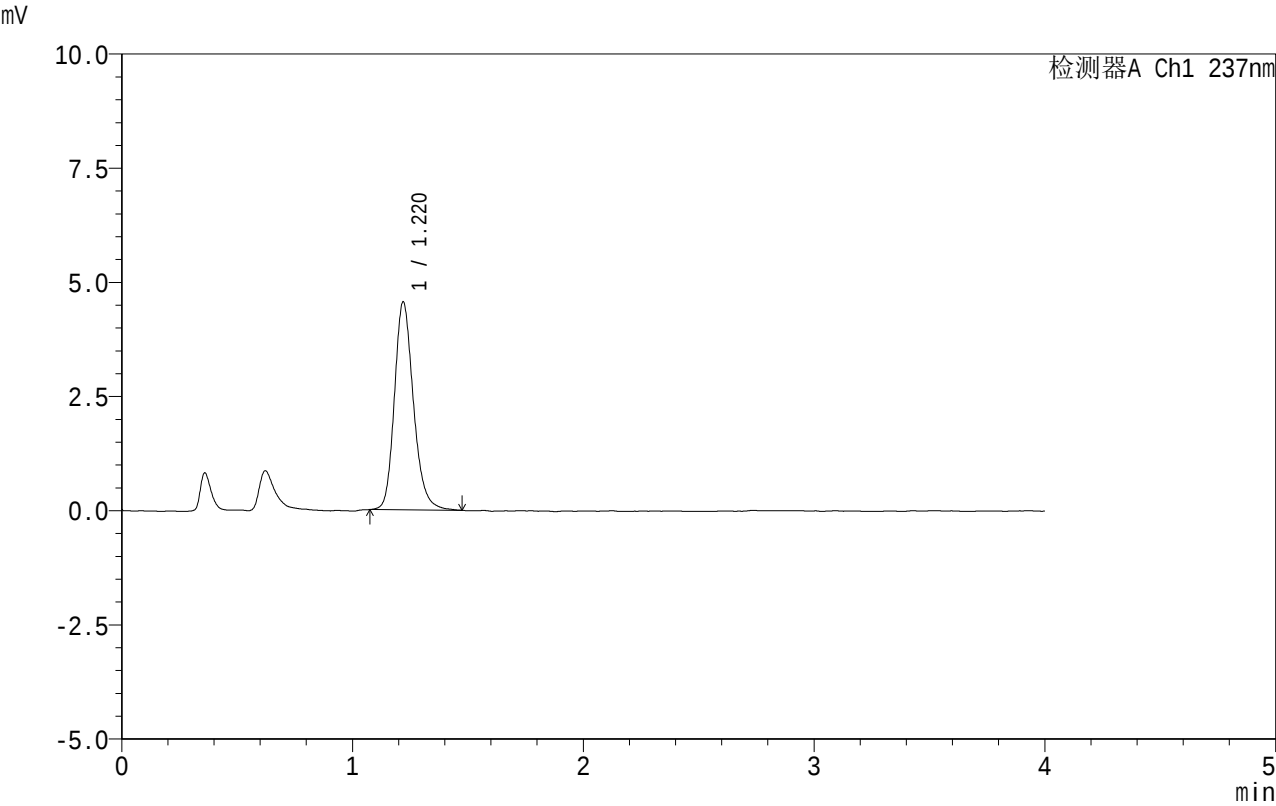

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	26111	100.000	4547	1092	1.206	--
总计		26111	100.000	4547			

图4 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-3




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-235-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:04:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:39:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

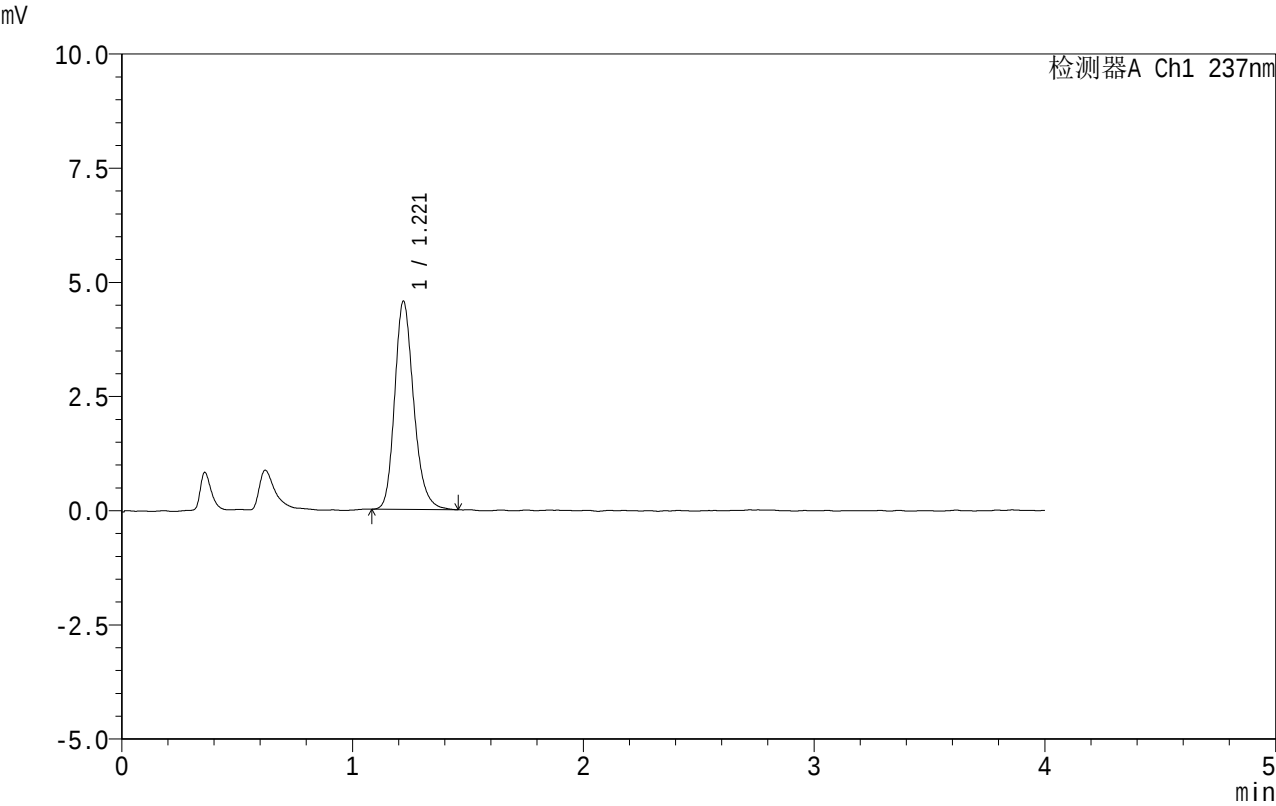

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	26057	100.000	4560	1096	1.214	--
总计		26057	100.000	4560			


图5 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-236-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:09:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:39:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

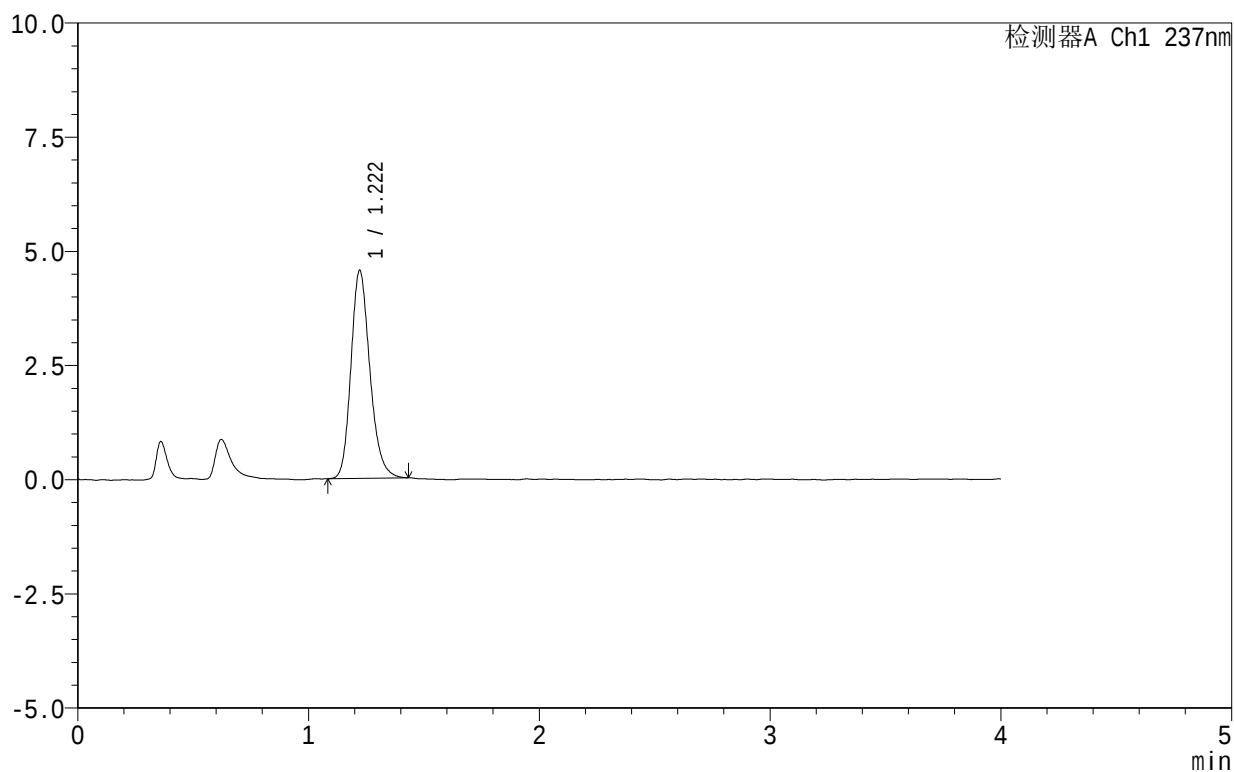

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	25919	100.000	4556	1098	1.205	--
总计		25919	100.000	4556			

图6 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-5




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-237-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:13:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:39:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

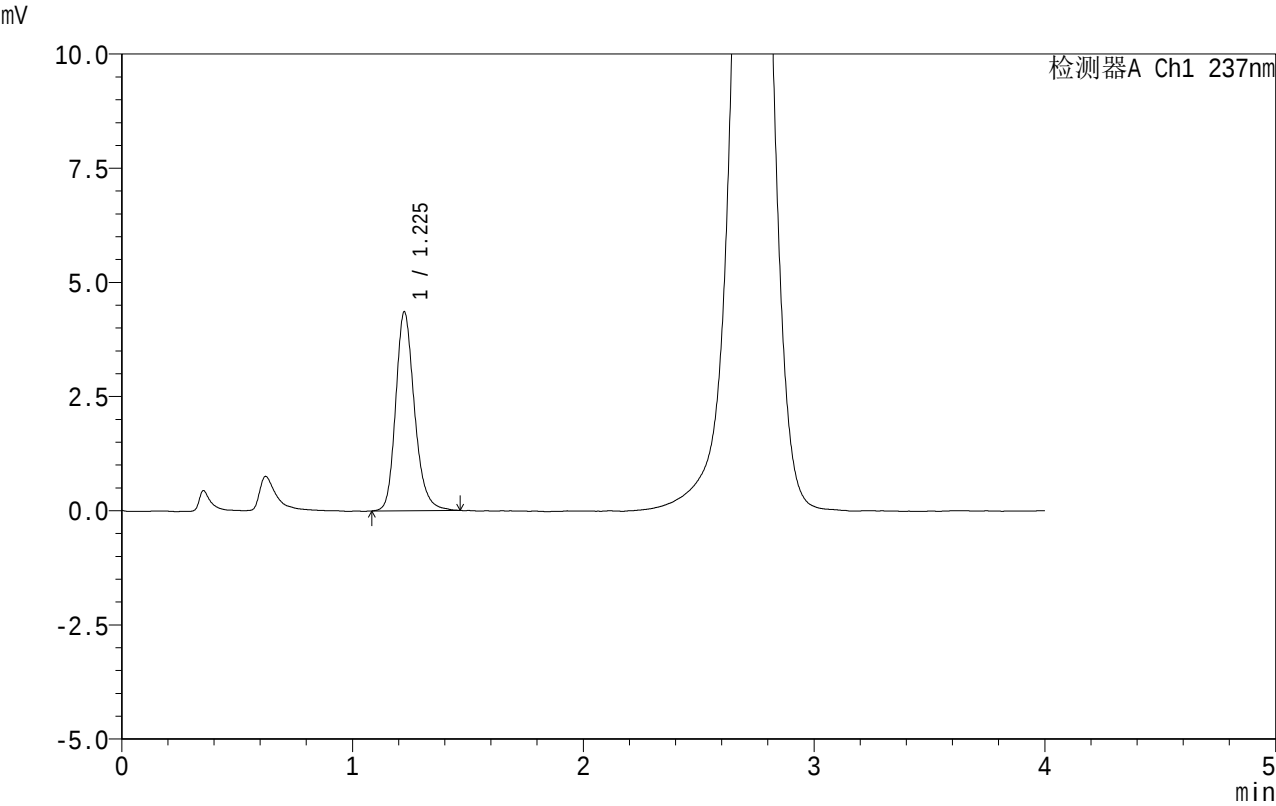

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	24648	100.000	4344	1135	1.217	--
总计		24648	100.000	4344			


图7 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-238-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:17:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:39:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

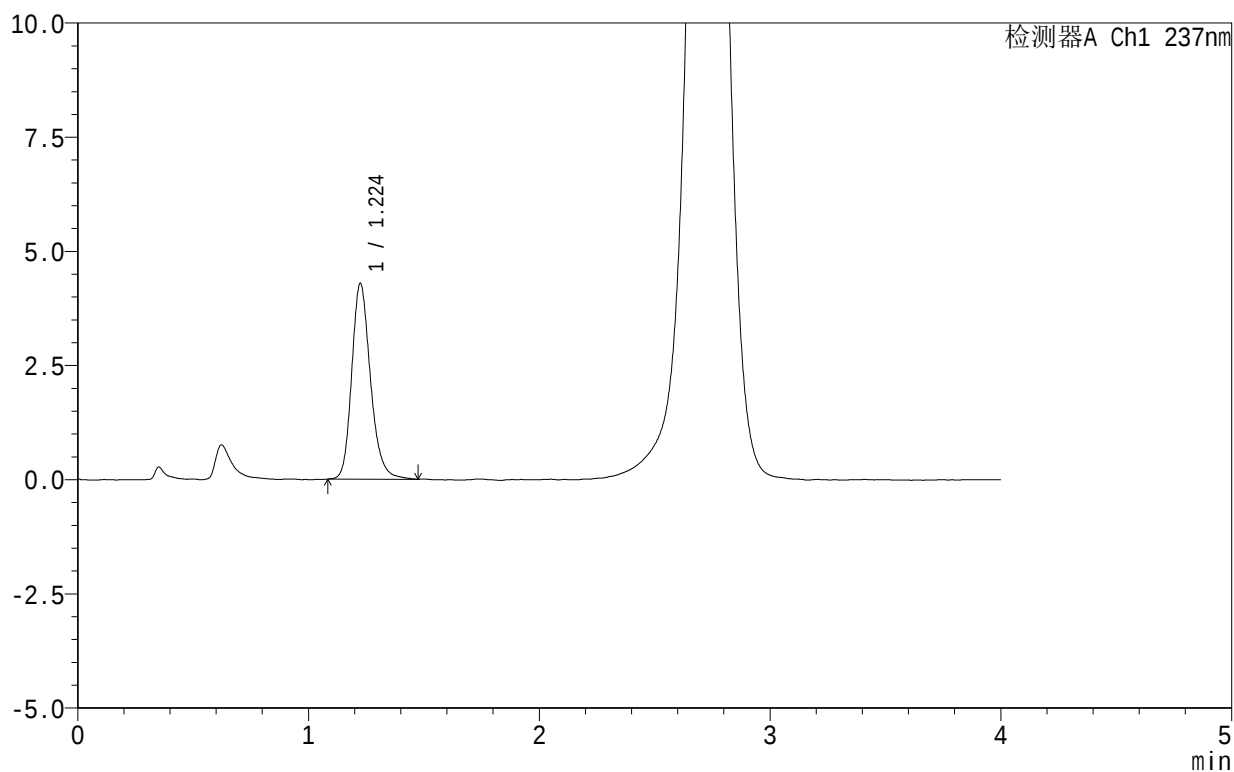

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	24204	100.000	4277	1139	1.221	--
总计		24204	100.000	4277			

图8 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-5min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-239-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:22:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:39:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

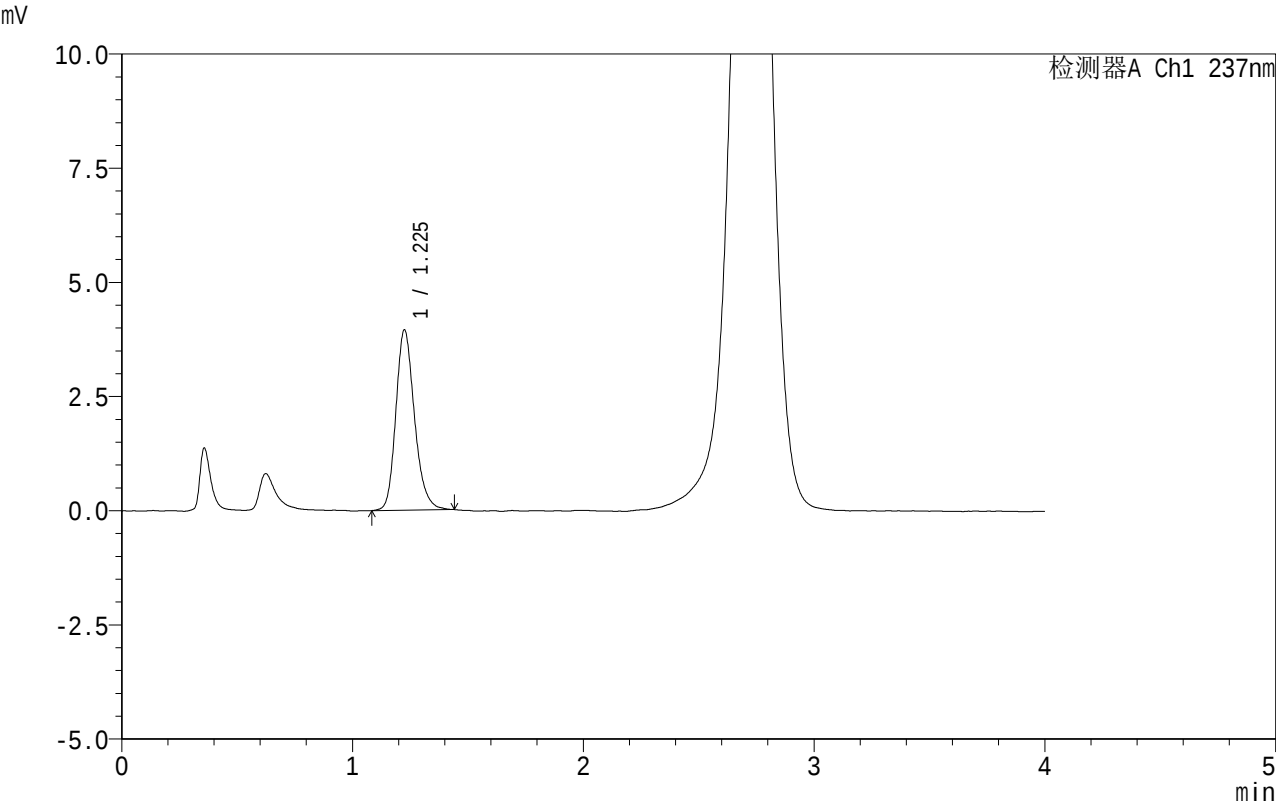

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	22148	100.000	3933	1144	1.212	--
总计		22148	100.000	3933			


图9 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-240-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:26:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:39:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

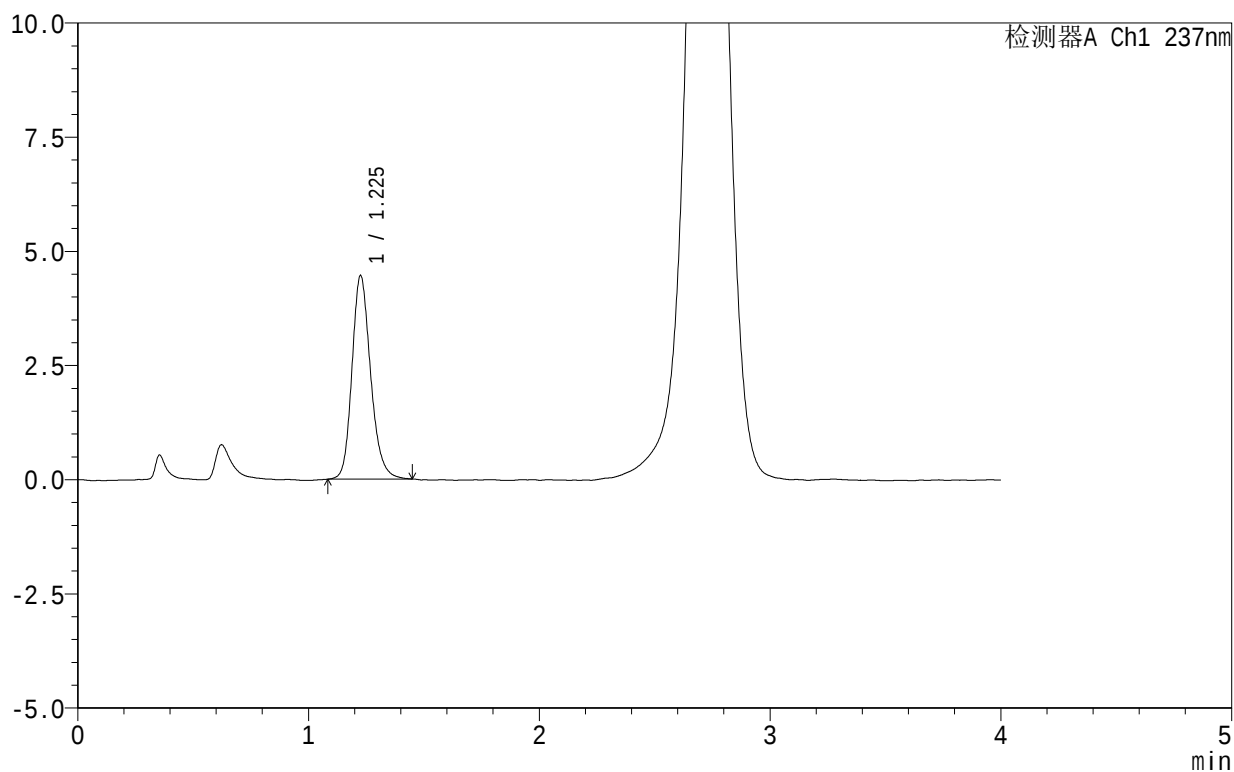

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	25041	100.000	4434	1146	1.203	--
总计		25041	100.000	4434			

图10 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-5min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-241-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:30:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:39:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

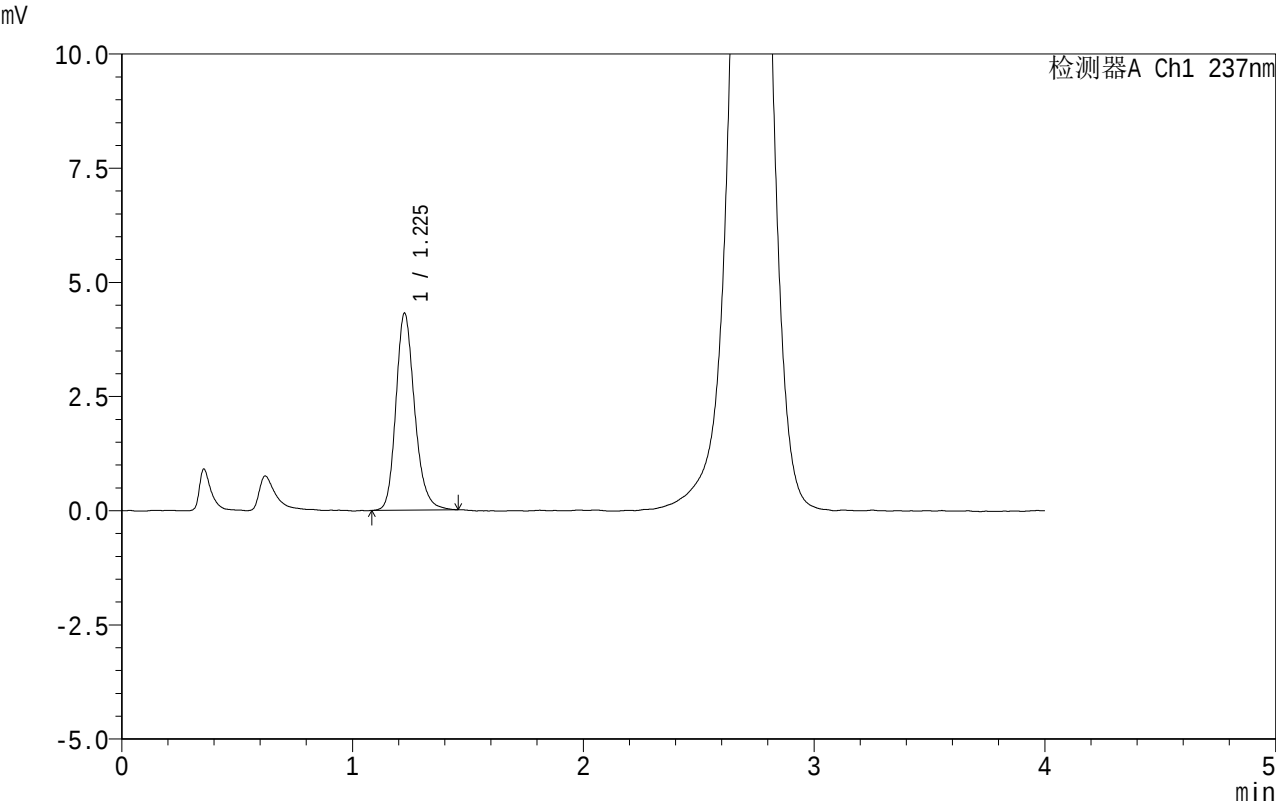

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	24324	100.000	4291	1145	1.211	--
总计		24324	100.000	4291			

图11 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-5min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-242-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:35:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:39:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

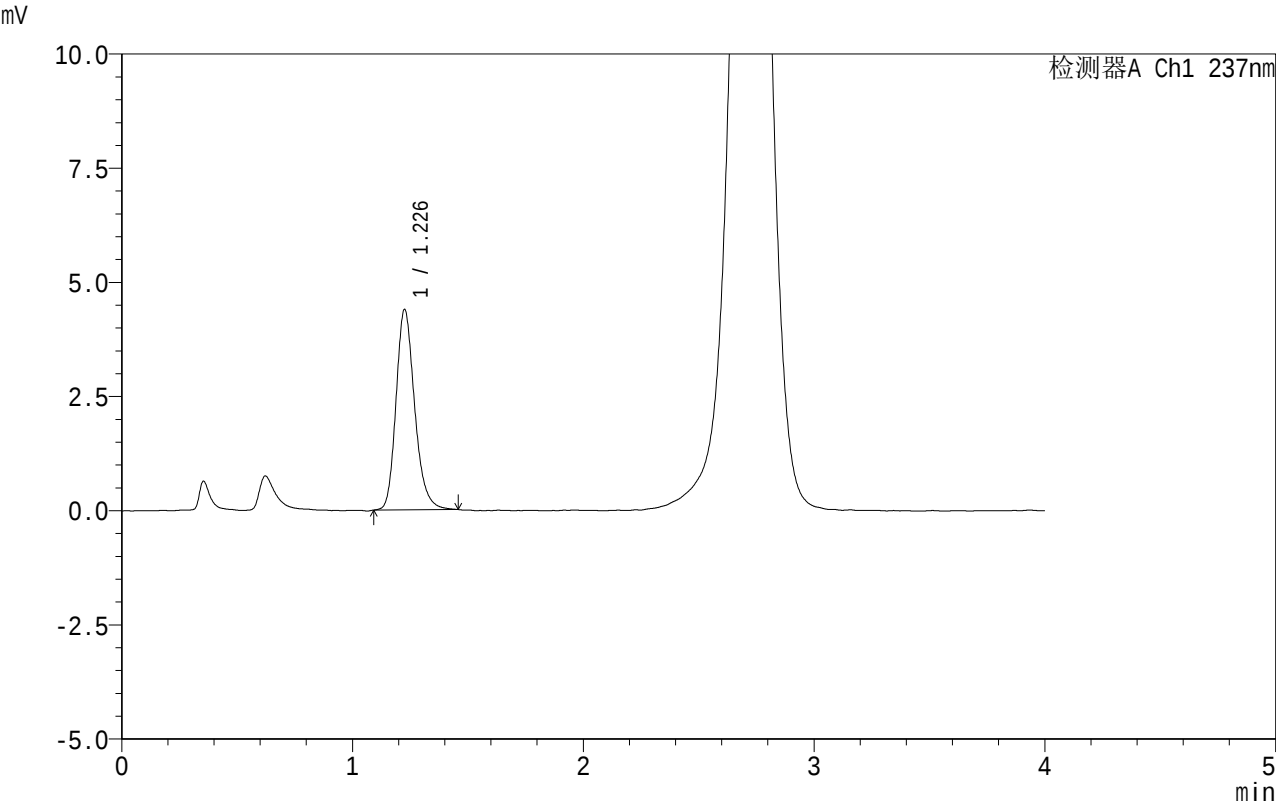

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	24604	100.000	4365	1150	1.220	--
总计		24604	100.000	4365			


图12 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-243-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:39:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:39:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

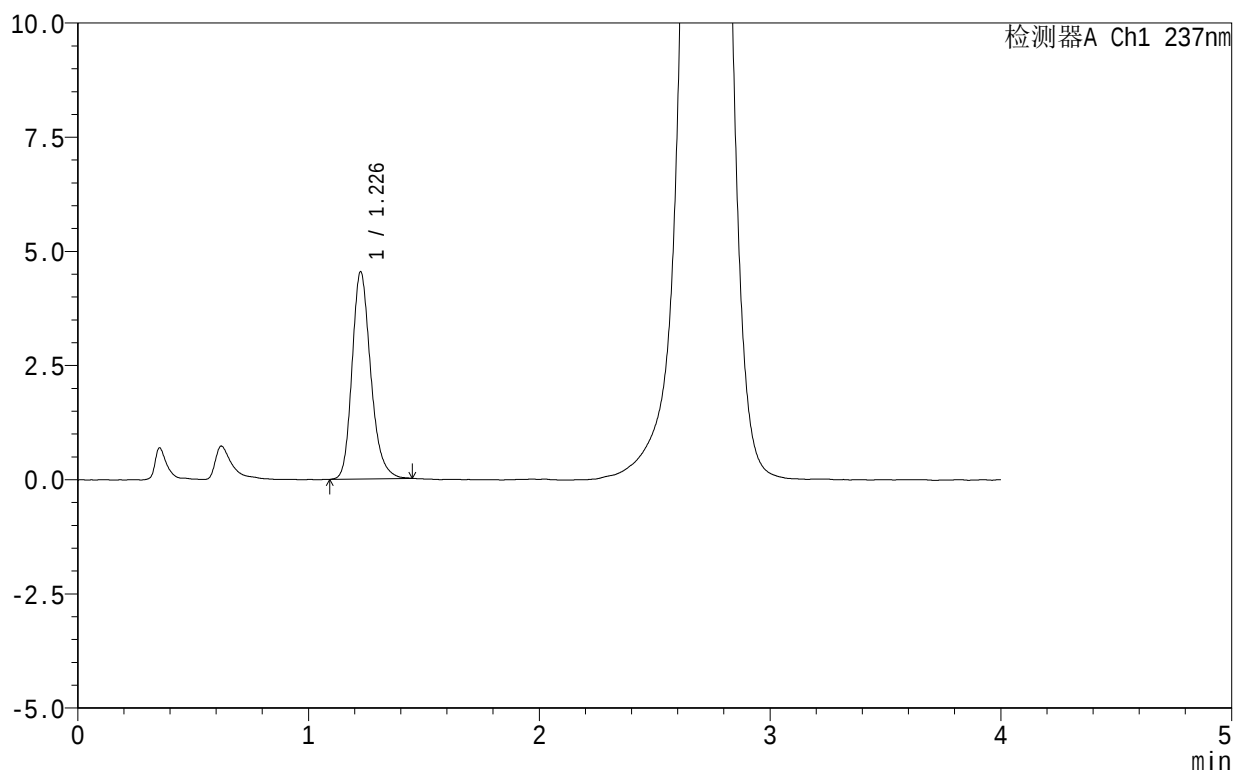

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	25497	100.000	4512	1150	1.230	--
总计		25497	100.000	4512			


图13 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-244-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:44:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:39:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

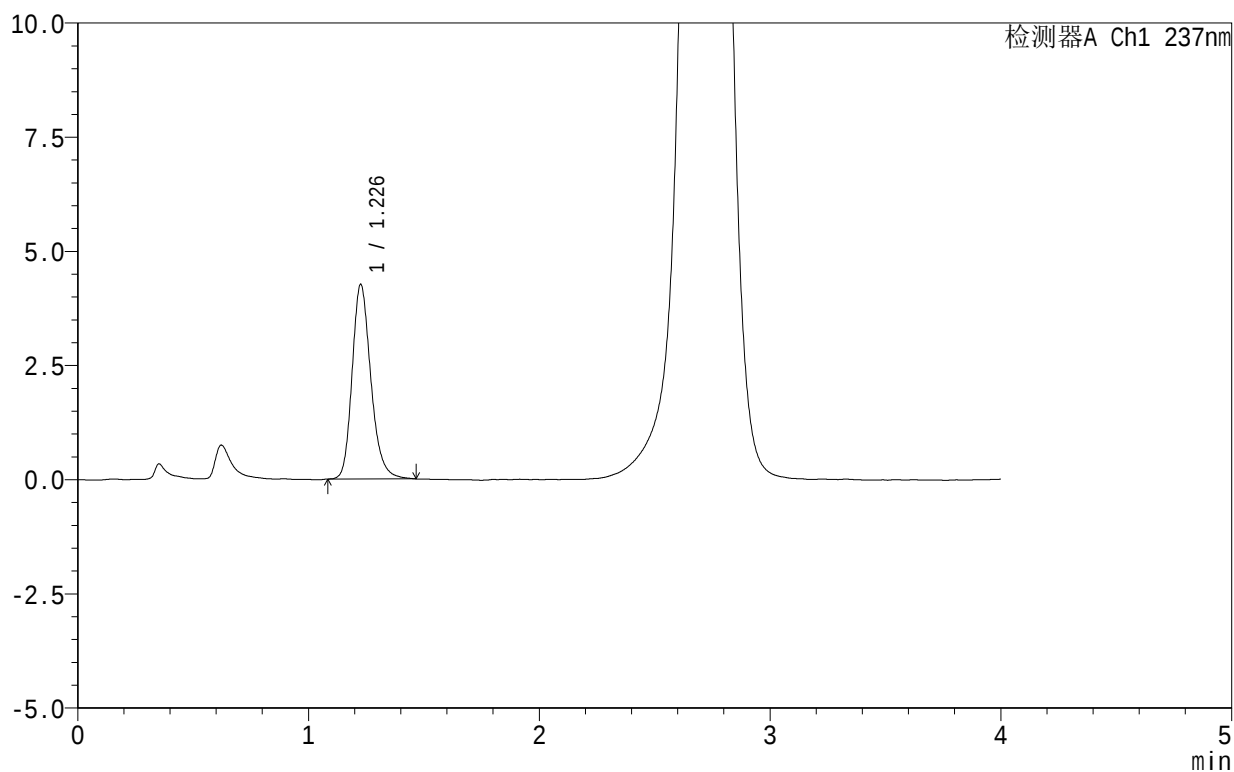

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	24070	100.000	4238	1136	1.226	--
总计		24070	100.000	4238			

图14 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-10min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-245-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:48:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:39:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

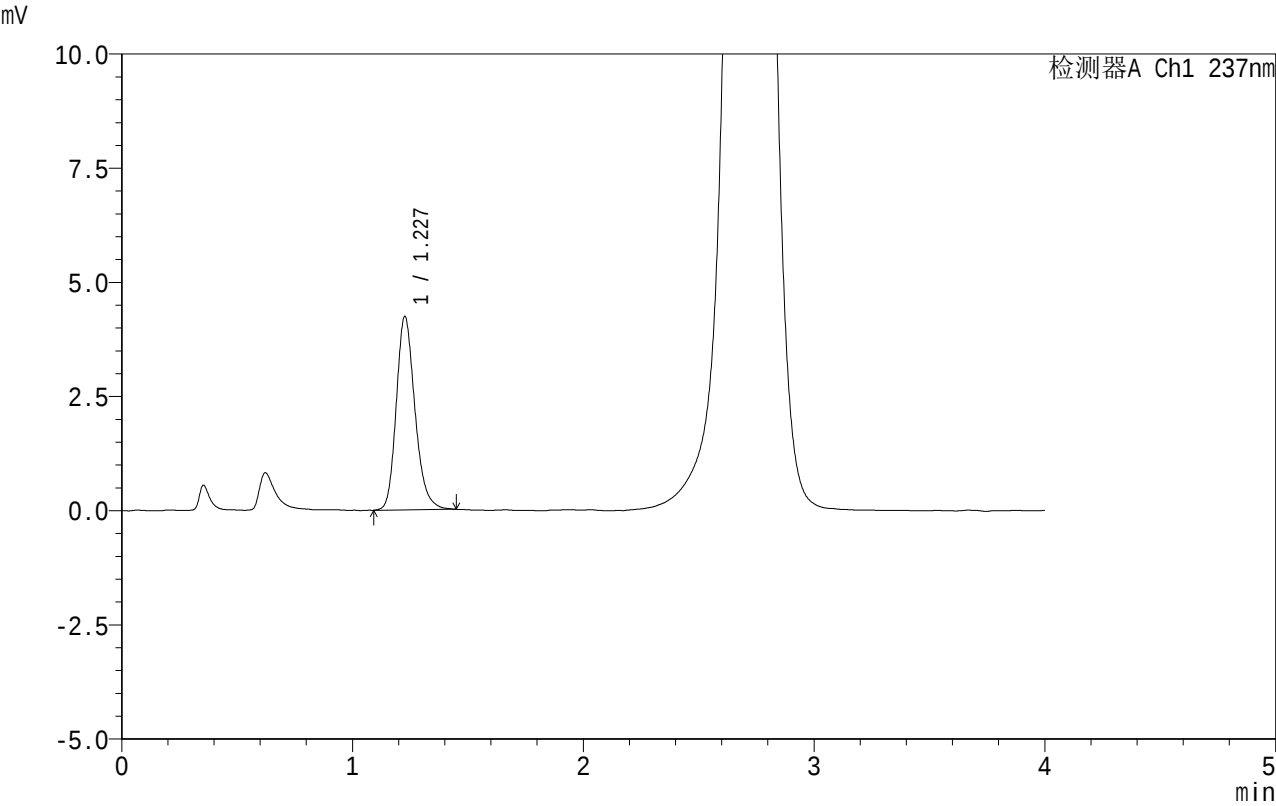

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	23847	100.000	4220	1134	1.217	--
总计		23847	100.000	4220			

图15 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-10min-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-246-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:52:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:39:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

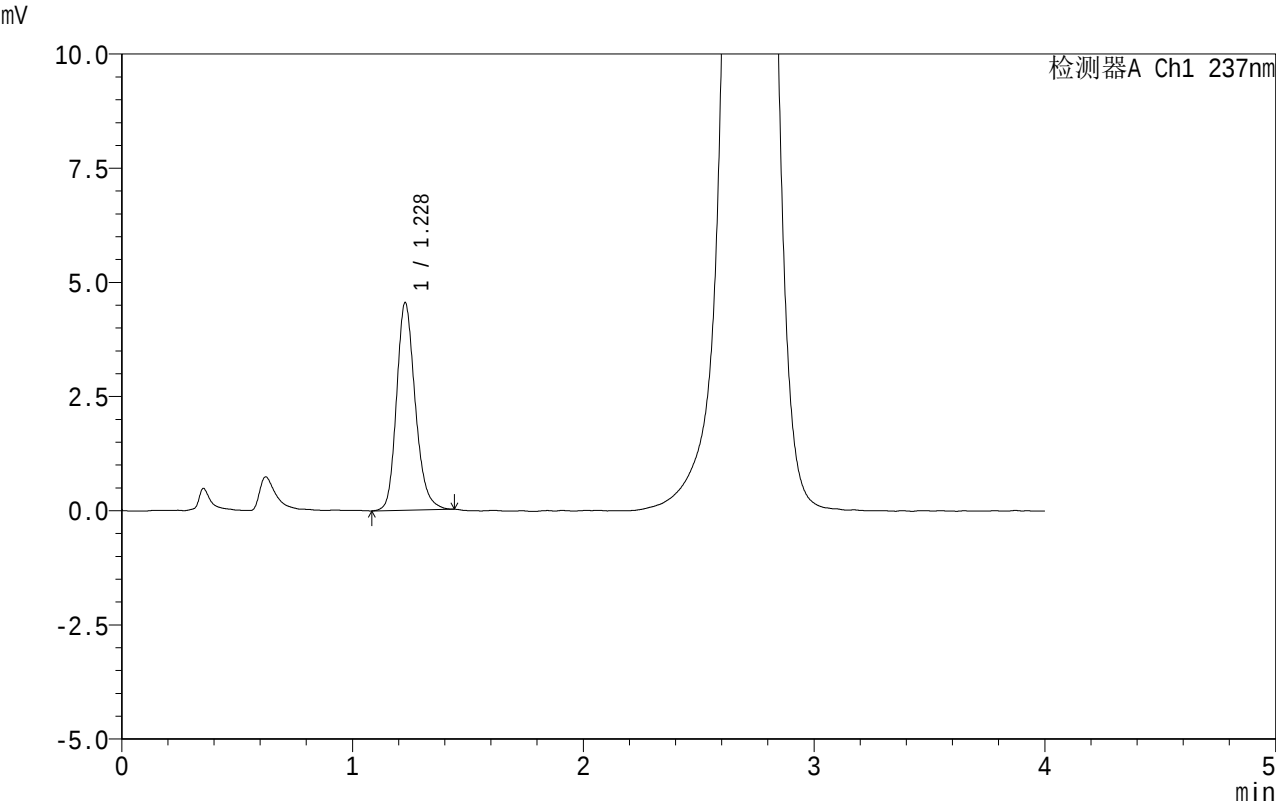

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	25521	100.000	4539	1143	1.205	--
总计		25521	100.000	4539			


图16 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-247-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:57:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:39:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

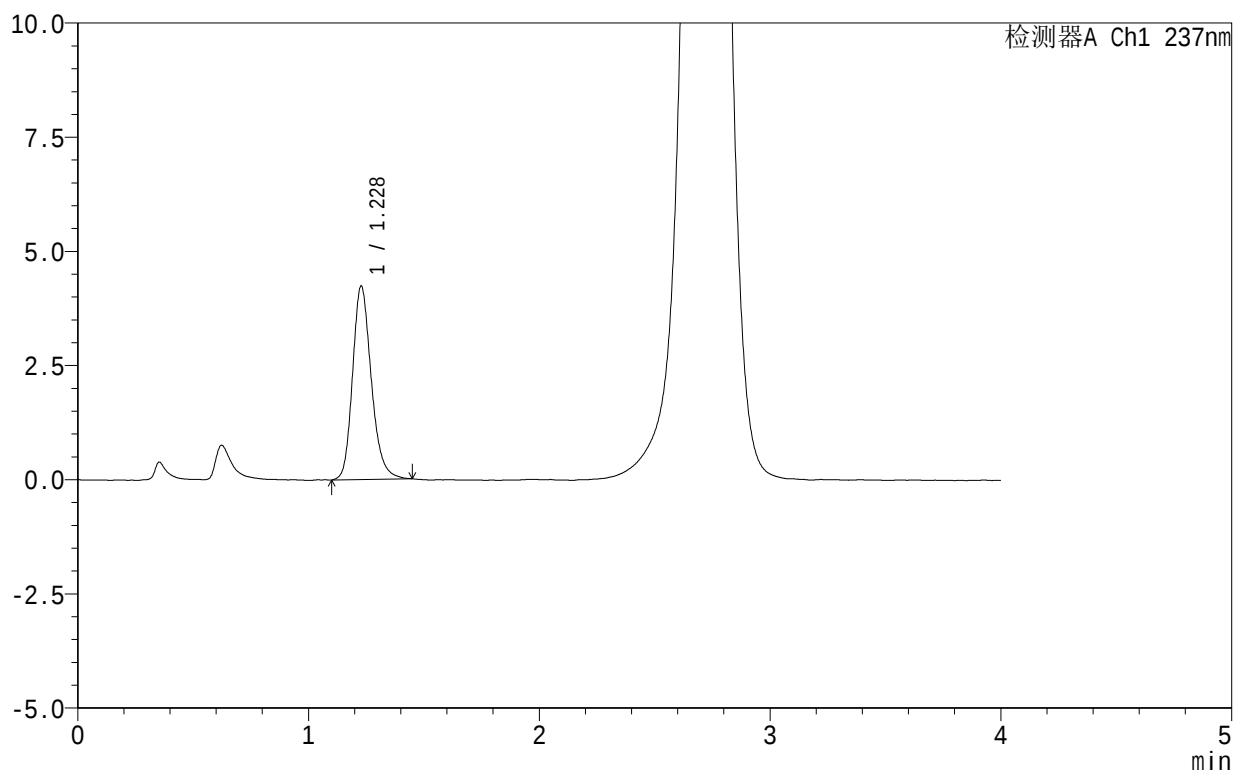

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23886	100.000	4232	1140	1.217	--
总计		23886	100.000	4232			


图17 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-248-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:01:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:39:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

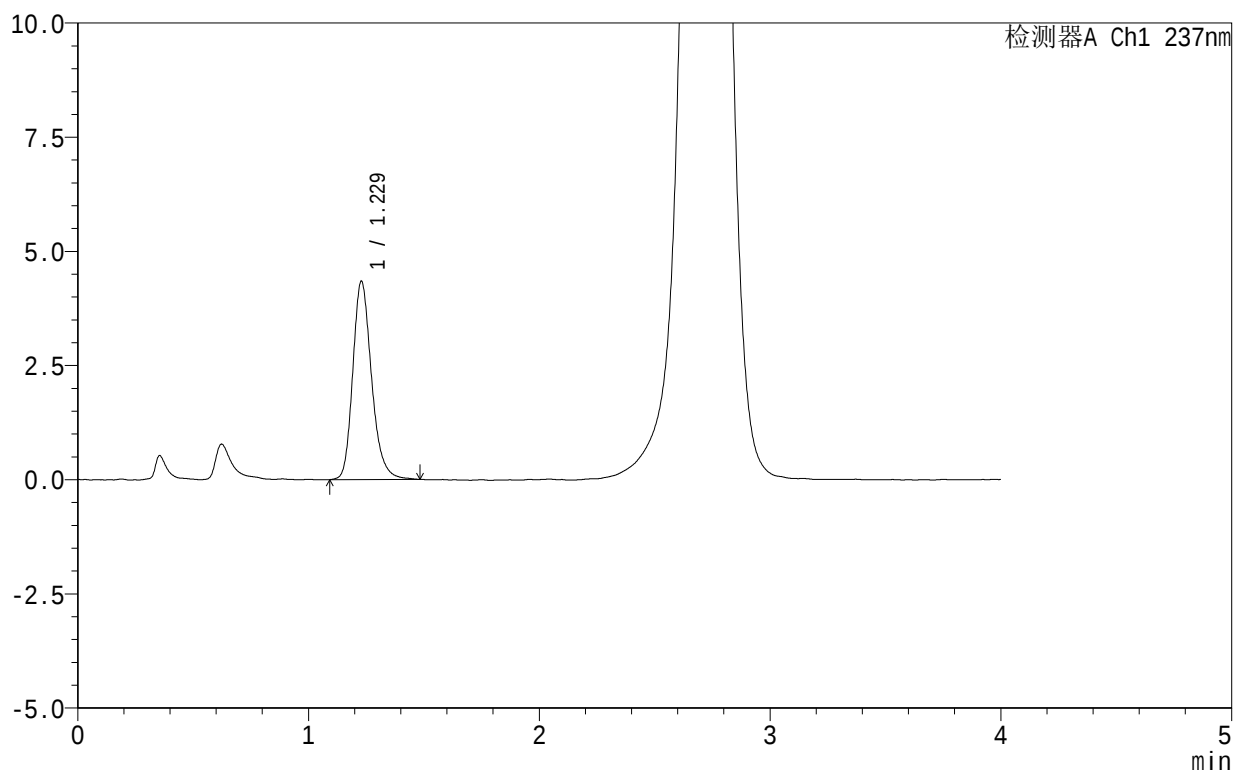

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	24577	100.000	4344	1145	1.229	--
总计		24577	100.000	4344			


图18 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-249-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:05:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:39:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

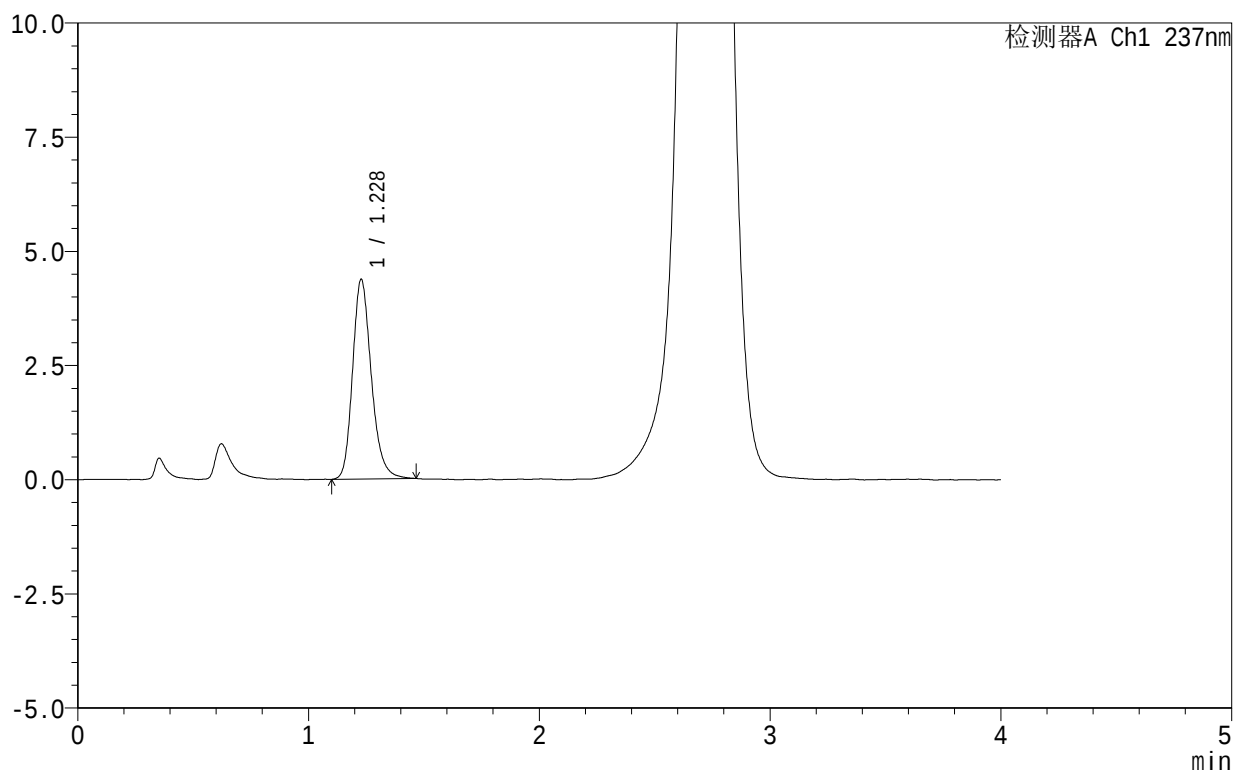

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	24636	100.000	4369	1142	1.223	--
总计		24636	100.000	4369			


图19 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-250-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:10:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:41:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

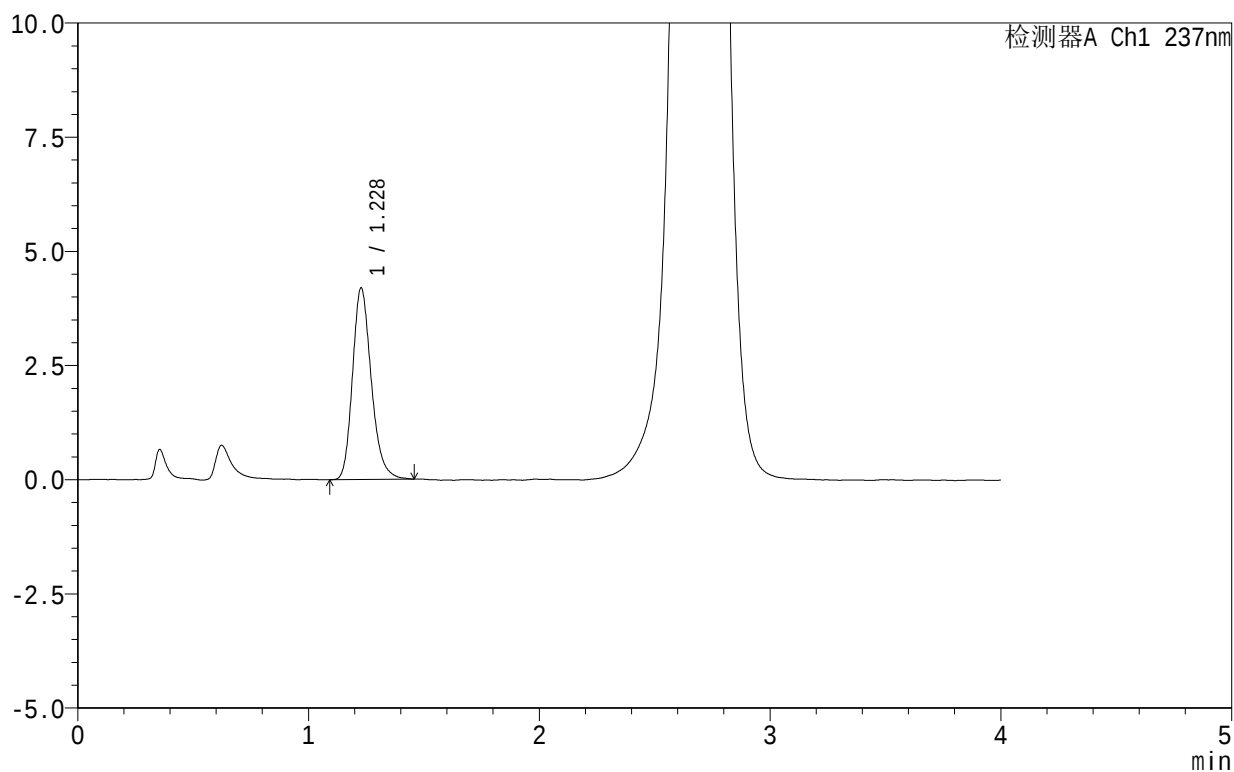

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23704	100.000	4191	1129	1.225	--
总计		23704	100.000	4191			


图20 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-251-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:14:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:40:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

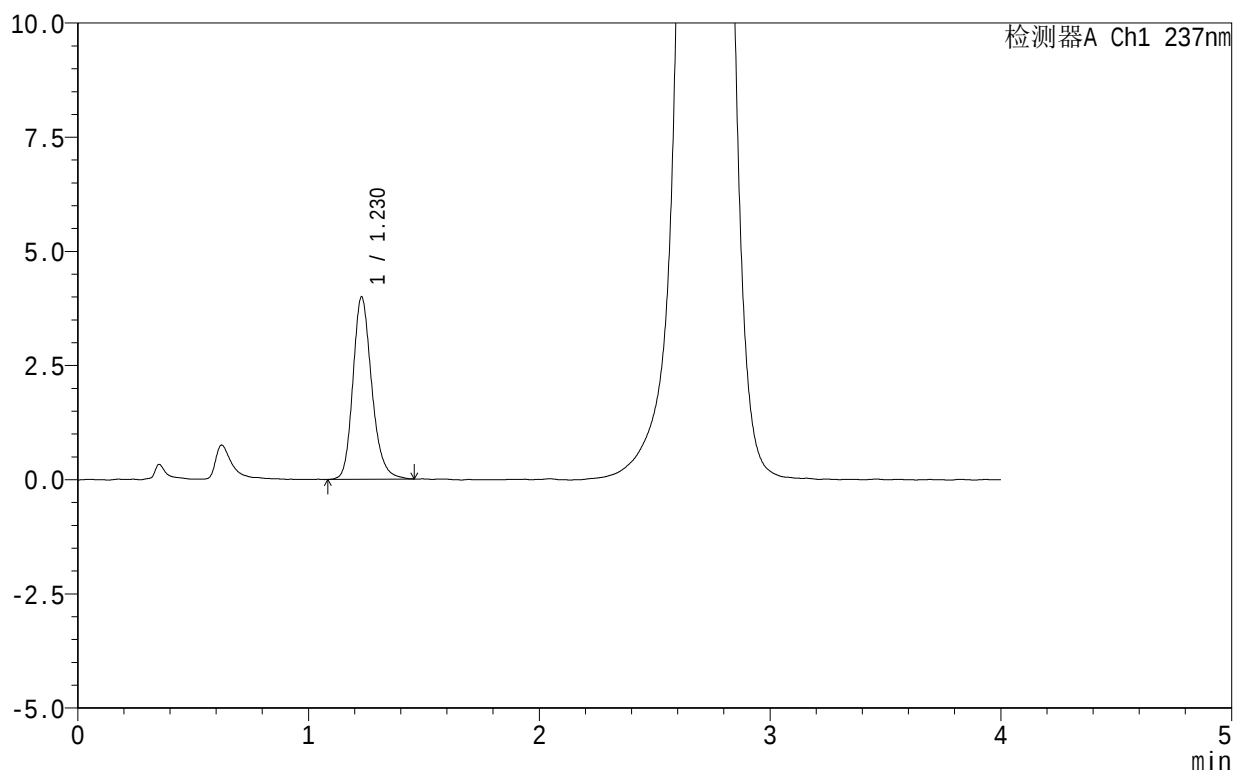

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	22659	100.000	3995	1137	1.210	--
总计		22659	100.000	3995			


图21 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-252-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:19:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:40:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

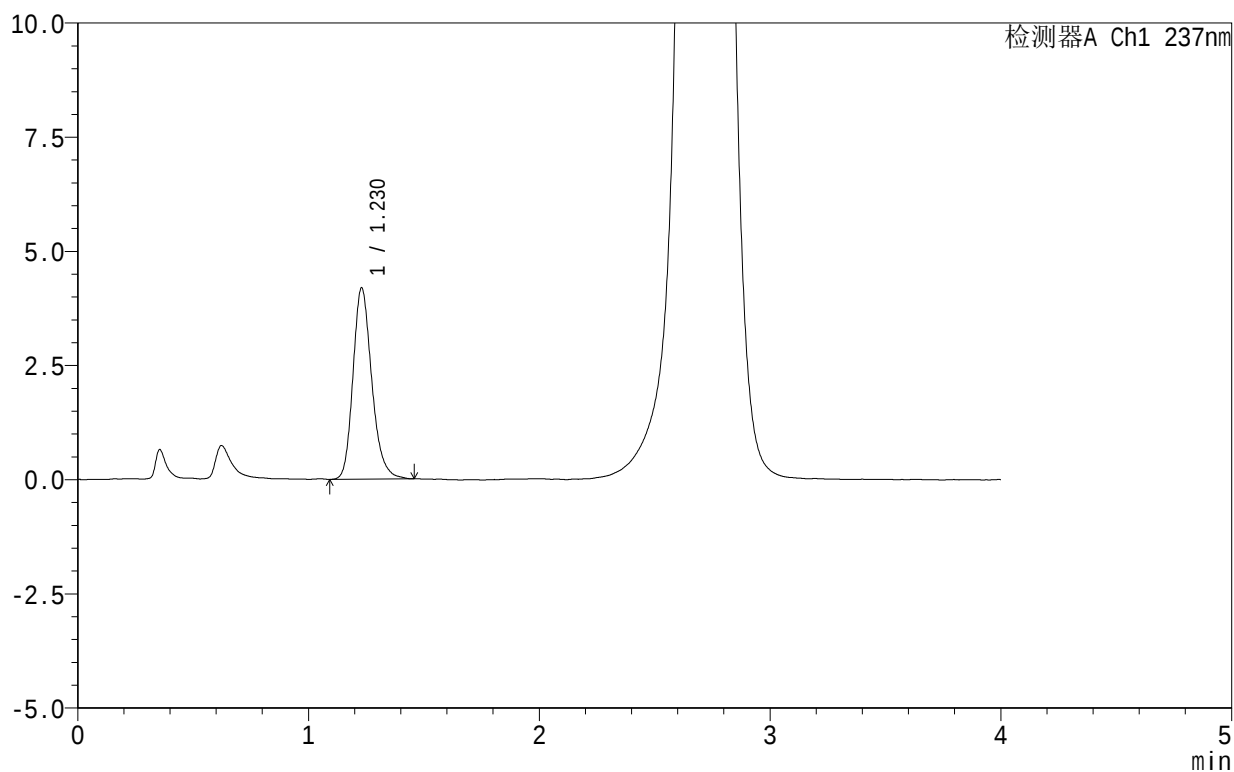

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	23700	100.000	4192	1135	1.223	--
总计		23700	100.000	4192			


图22 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-253-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:23:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:40:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

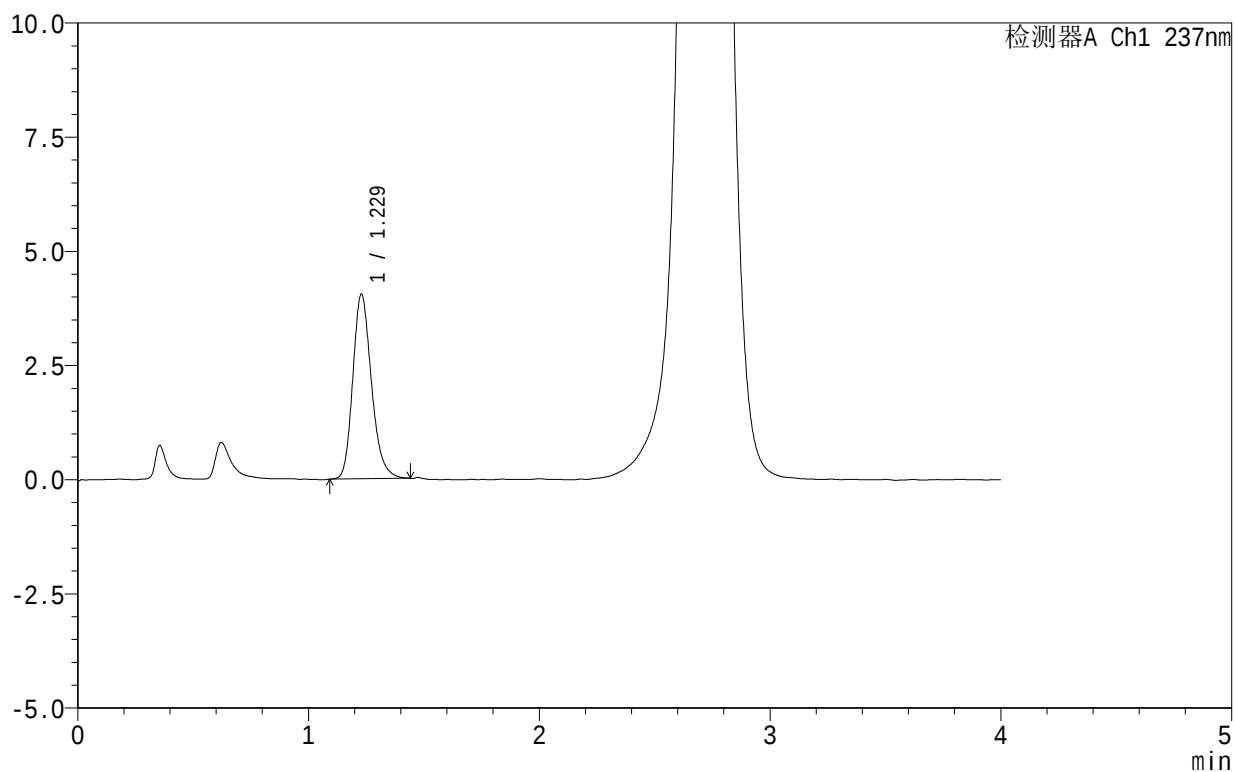

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	22722	100.000	4046	1139	1.215	--
总计		22722	100.000	4046			

图23 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-15min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-254-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:27:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:40:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

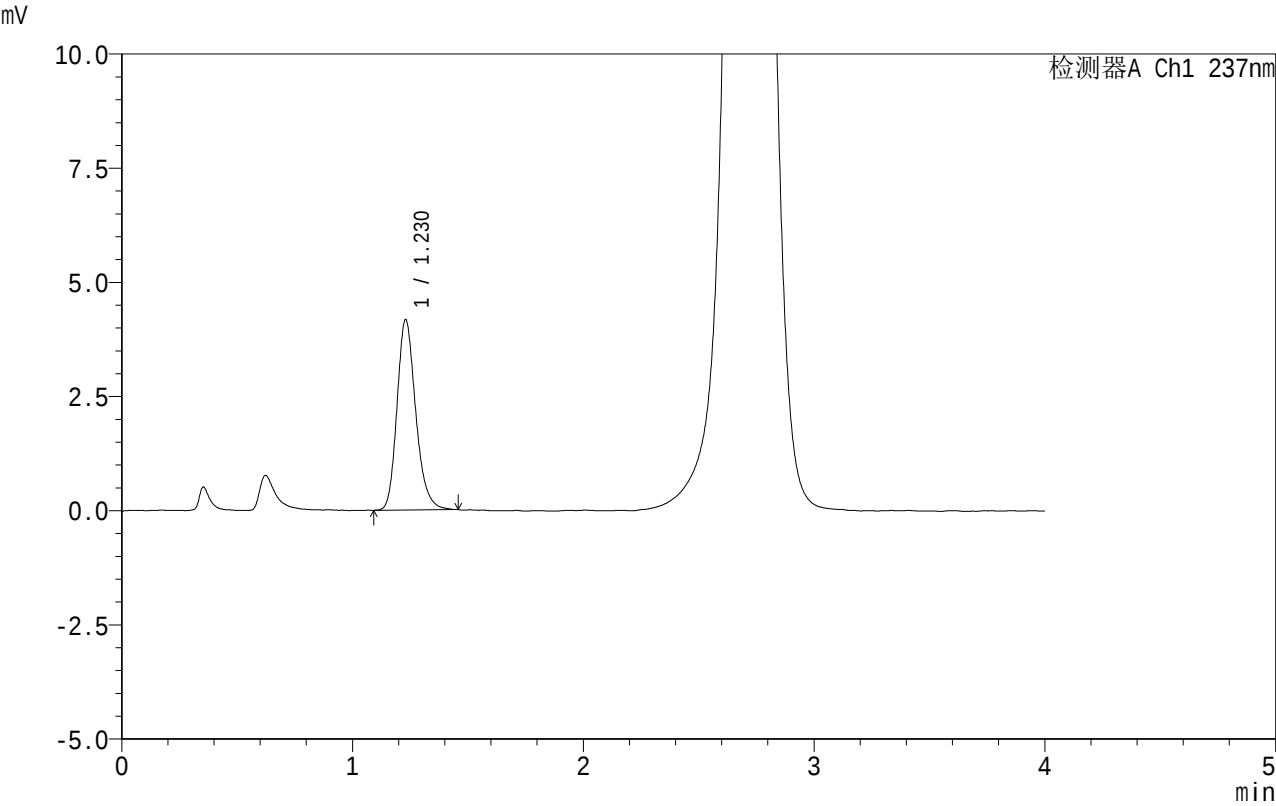

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	23481	100.000	4171	1141	1.217	--
总计		23481	100.000	4171			

图24 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-15min-片6
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-255-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:32:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:40:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

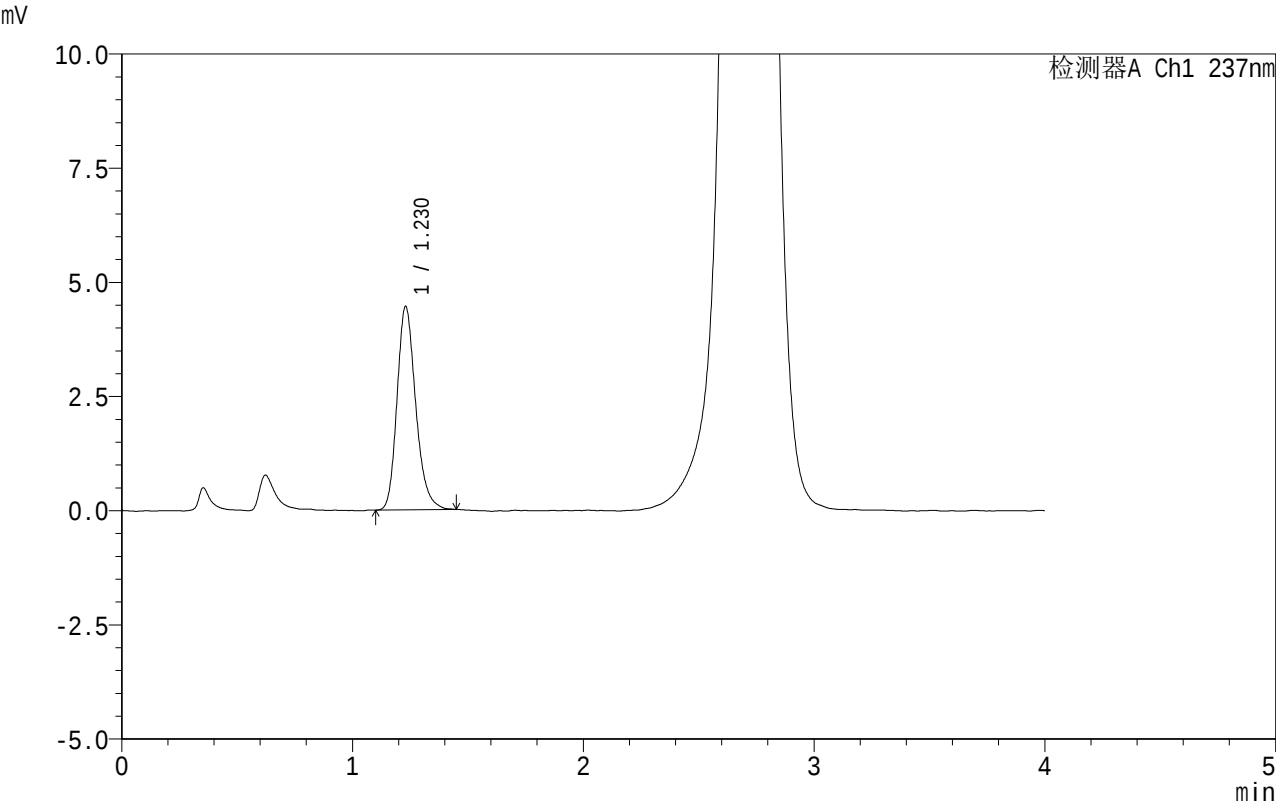

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	25071	100.000	4459	1146	1.223	--
总计		25071	100.000	4459			


图25 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-256-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:36:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:40:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

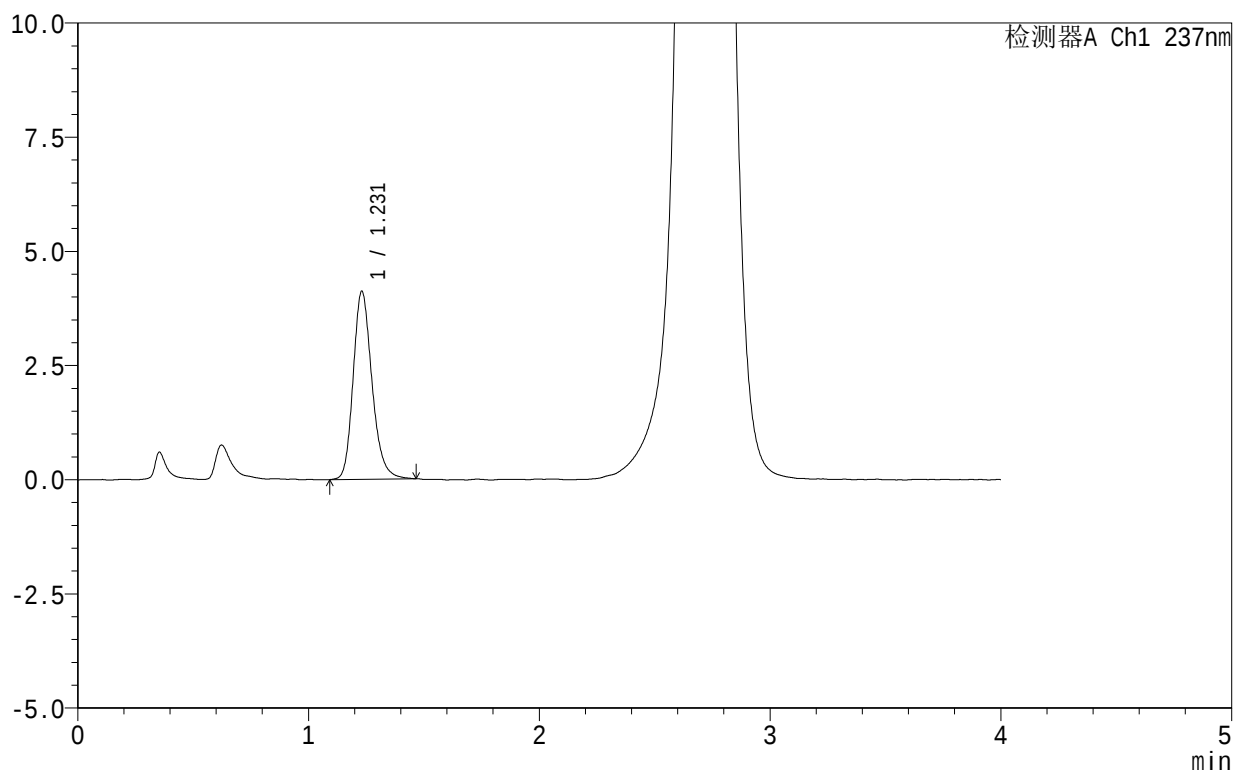

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	23352	100.000	4118	1133	1.214	--
总计		23352	100.000	4118			


图26 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-257-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:41:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:40:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

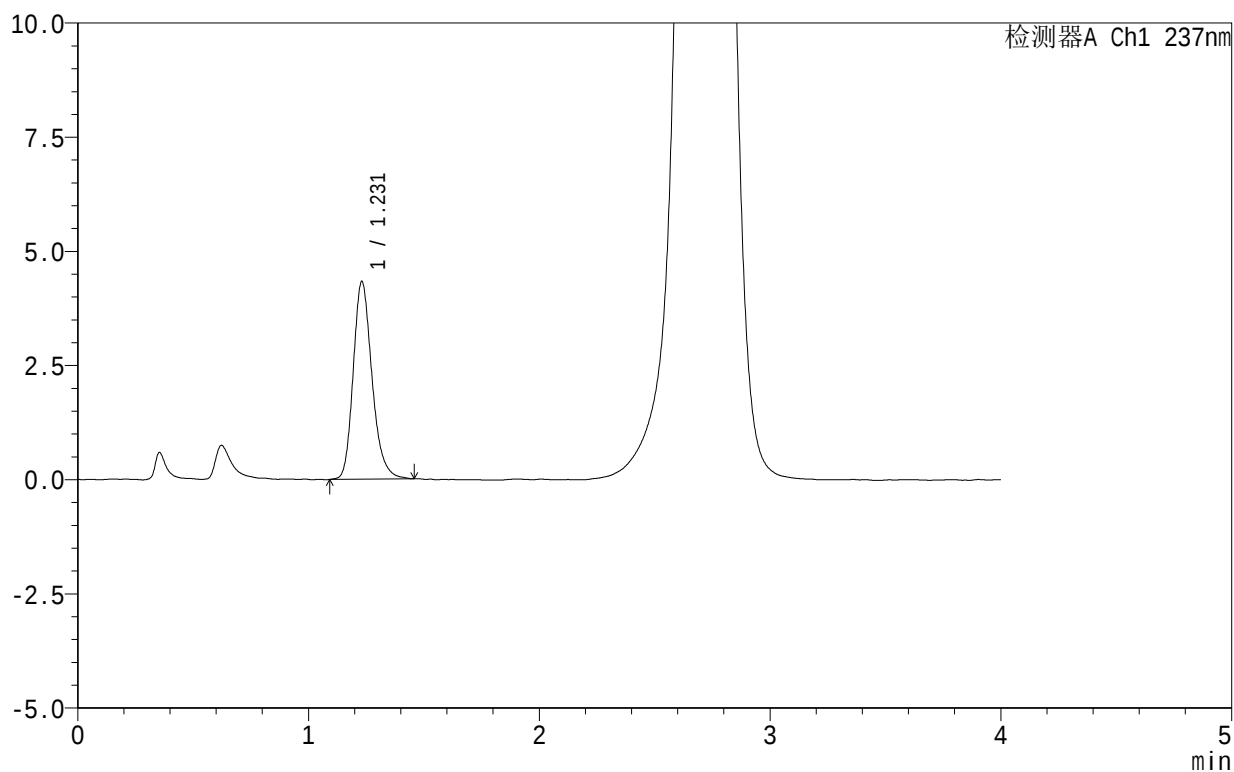

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	24520	100.000	4329	1136	1.227	--
总计		24520	100.000	4329			


图27 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-258-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:45:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:40:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

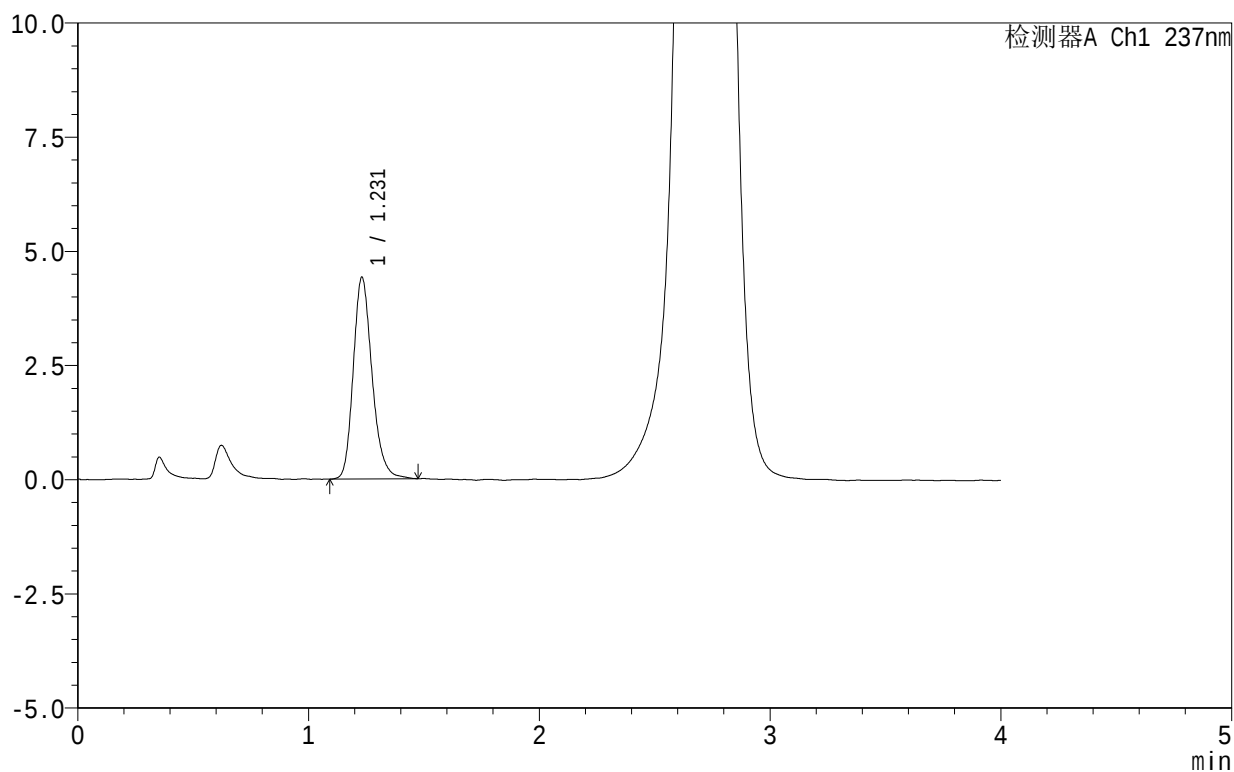

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	25055	100.000	4416	1131	1.220	--
总计		25055	100.000	4416			


图28 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-259-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:49:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:40:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

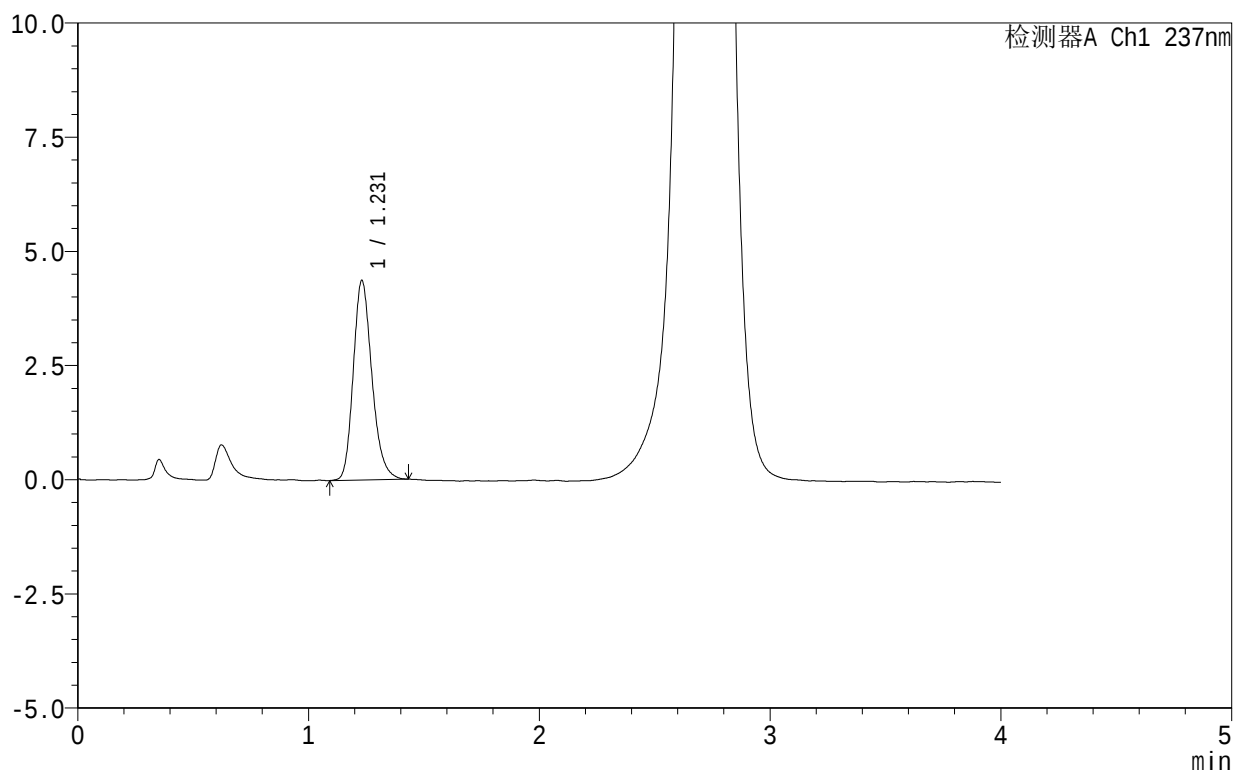

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	24463	100.000	4366	1141	1.214	--
总计		24463	100.000	4366			


图29 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-260-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:54:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:40:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

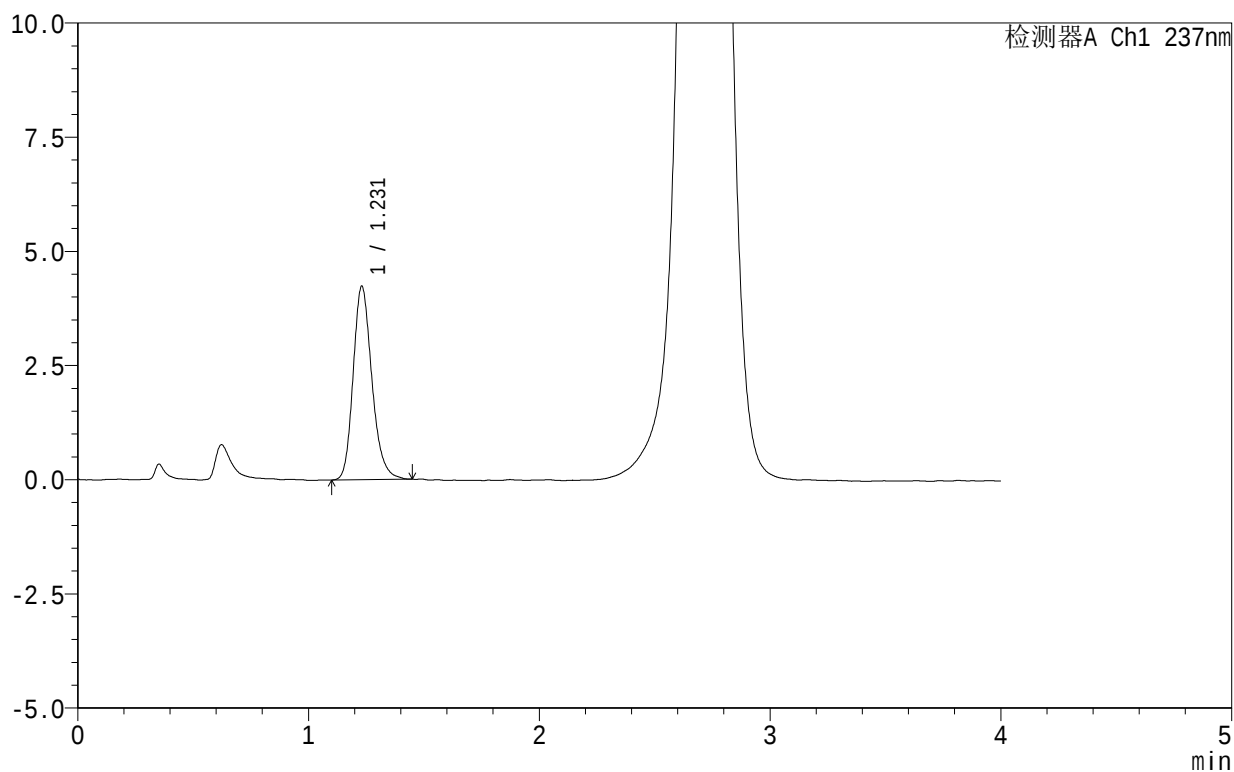

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	23915	100.000	4237	1140	1.216	--
总计		23915	100.000	4237			


图30 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-261-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:58:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:40:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

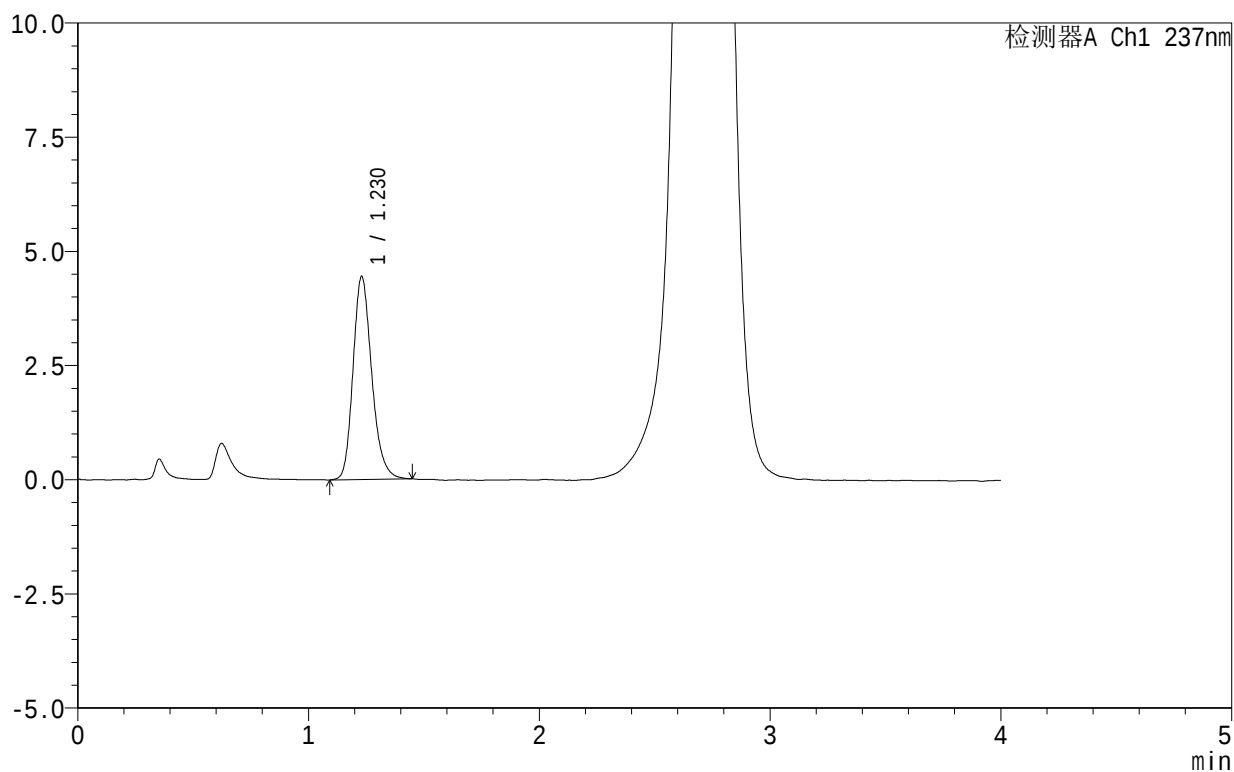

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	25049	100.000	4449	1142	1.215	--
总计		25049	100.000	4449			

图31 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-30min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-262-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:02:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:40:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

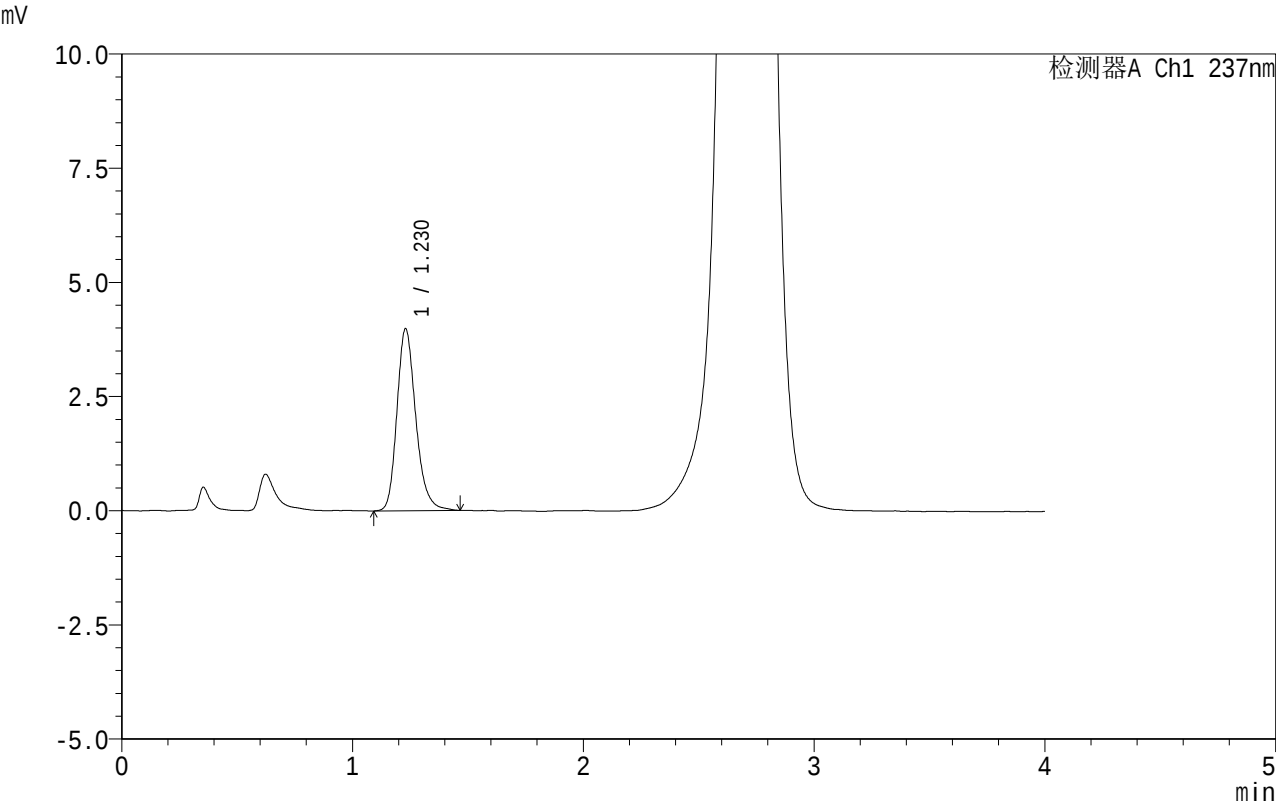

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	22623	100.000	3988	1136	1.226	--
总计		22623	100.000	3988			


图32 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-263-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:07:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:40:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

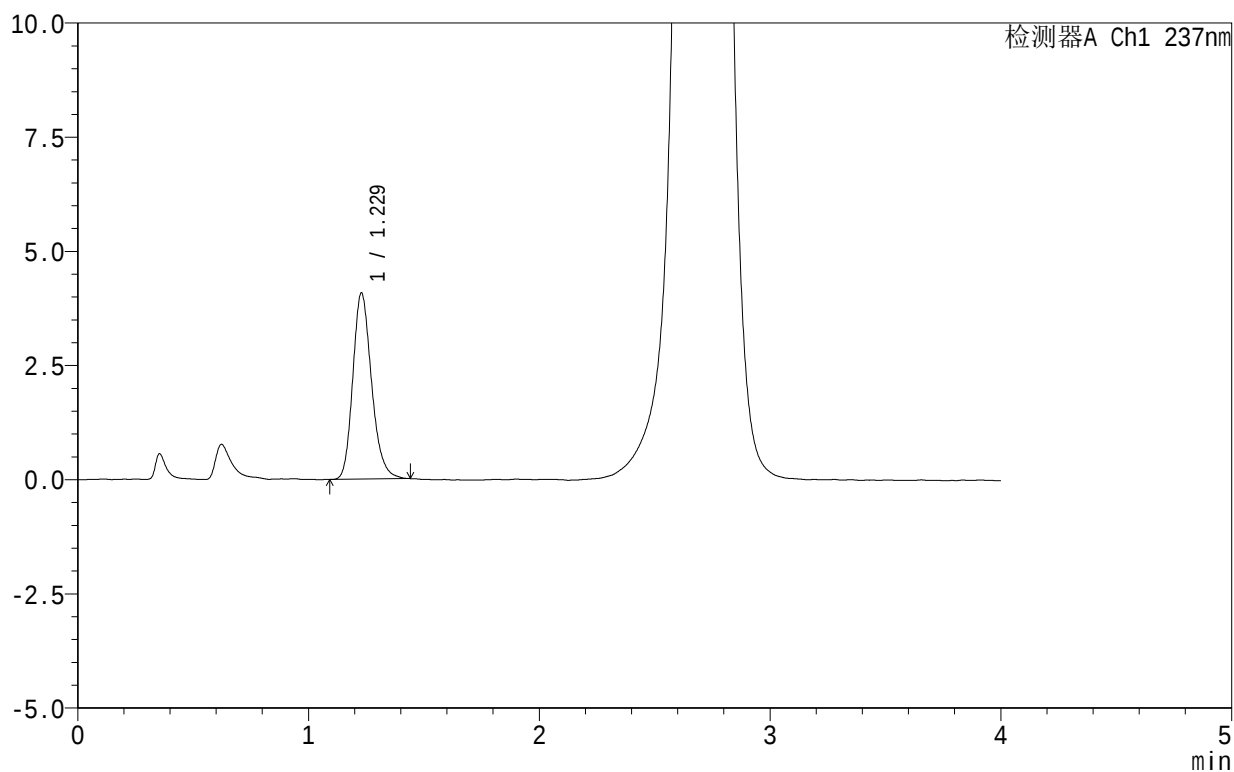

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	23012	100.000	4077	1131	1.212	--
总计		23012	100.000	4077			

图33 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-30min-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-264-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:11:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:40:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

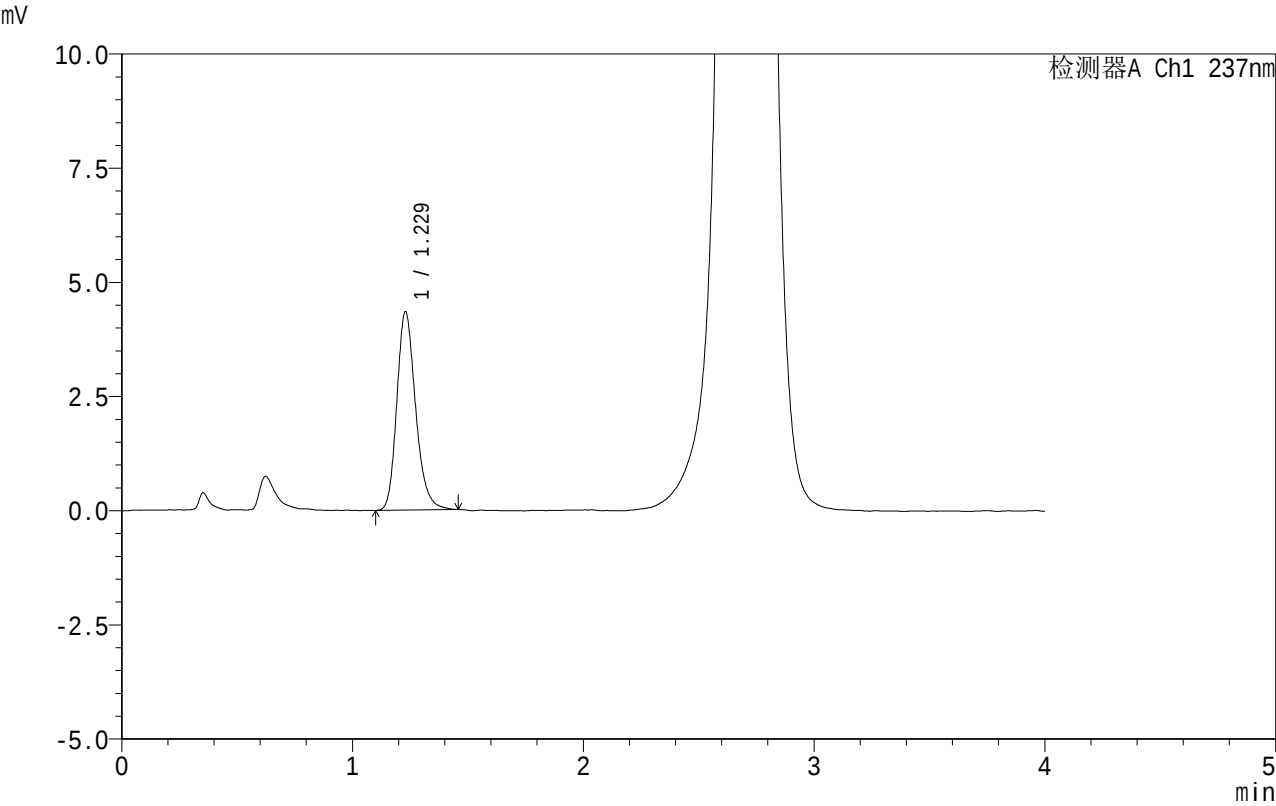

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	24530	100.000	4346	1135	1.226	--
总计		24530	100.000	4346			


图34 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-265-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:16:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:40:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

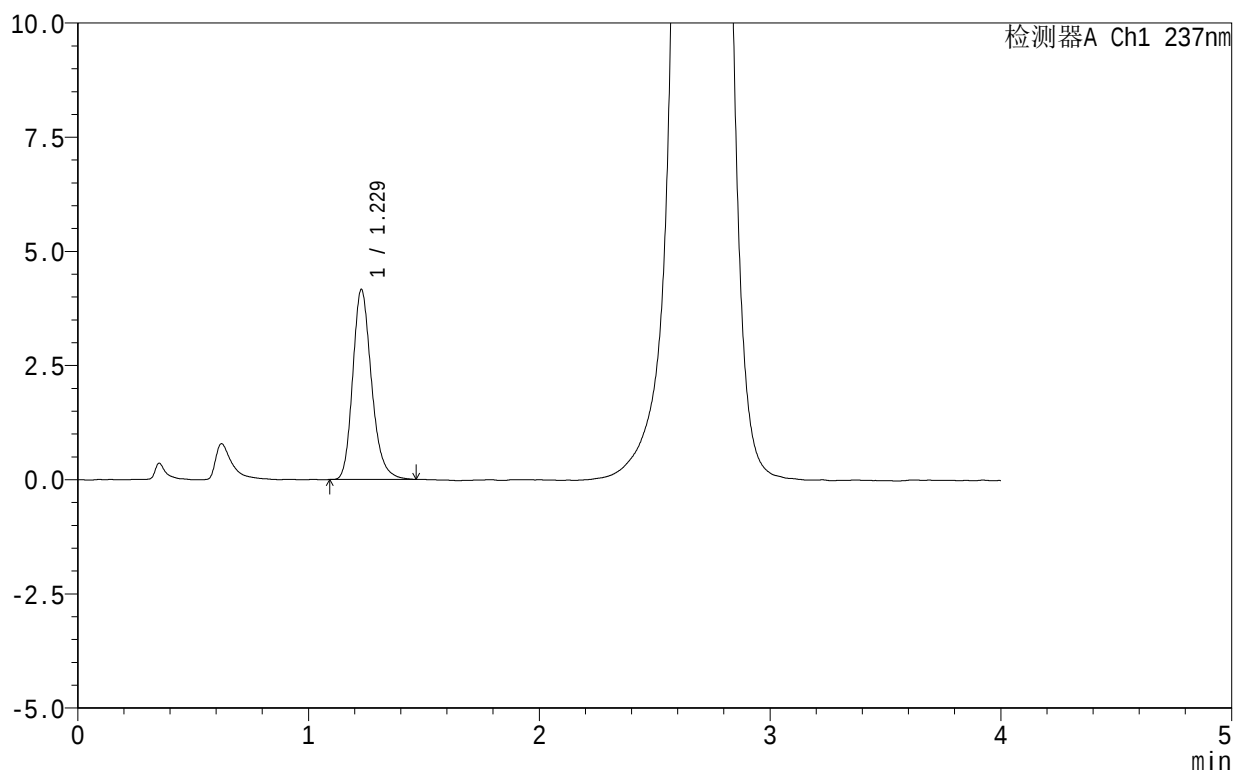

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	23540	100.000	4160	1134	1.227	--
总计		23540	100.000	4160			

图35 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-30min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-266-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:20:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:40:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

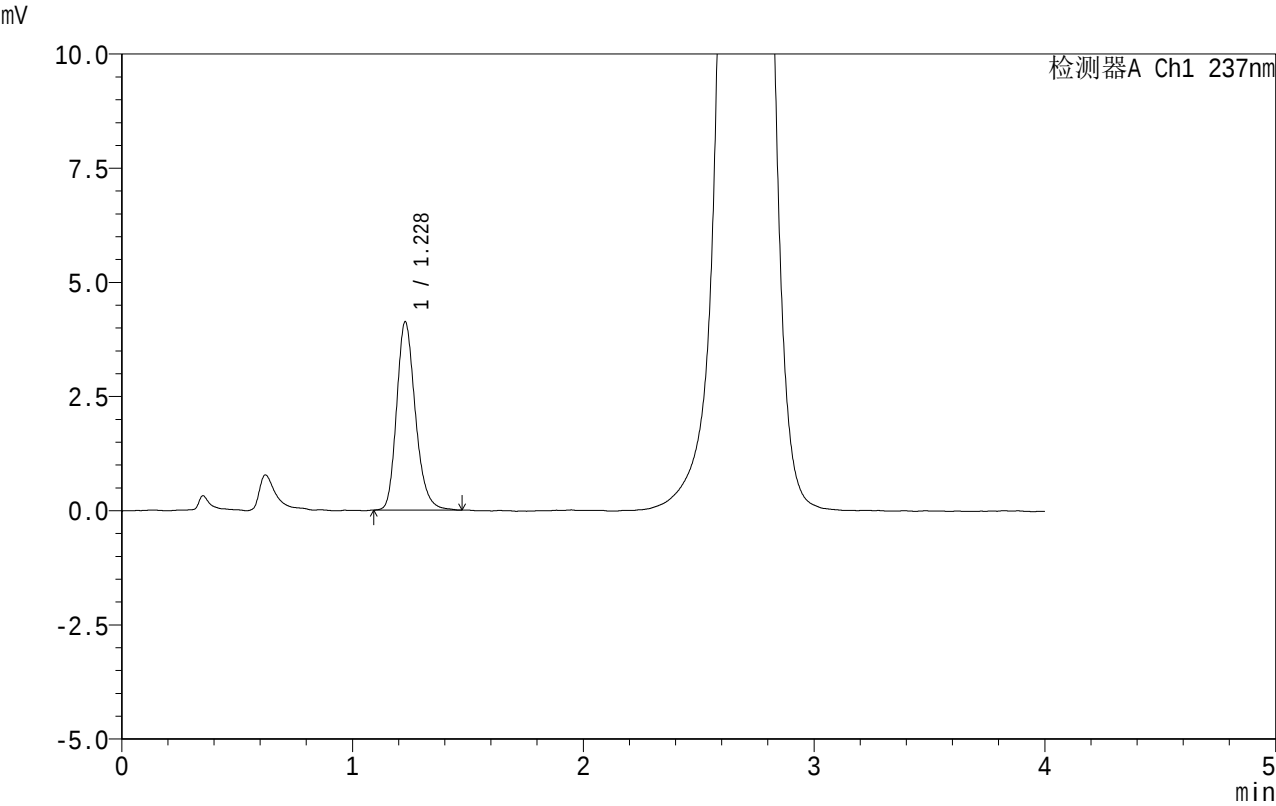

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23281	100.000	4119	1134	1.223	--
总计		23281	100.000	4119			


图36 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-267-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:24:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:40:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

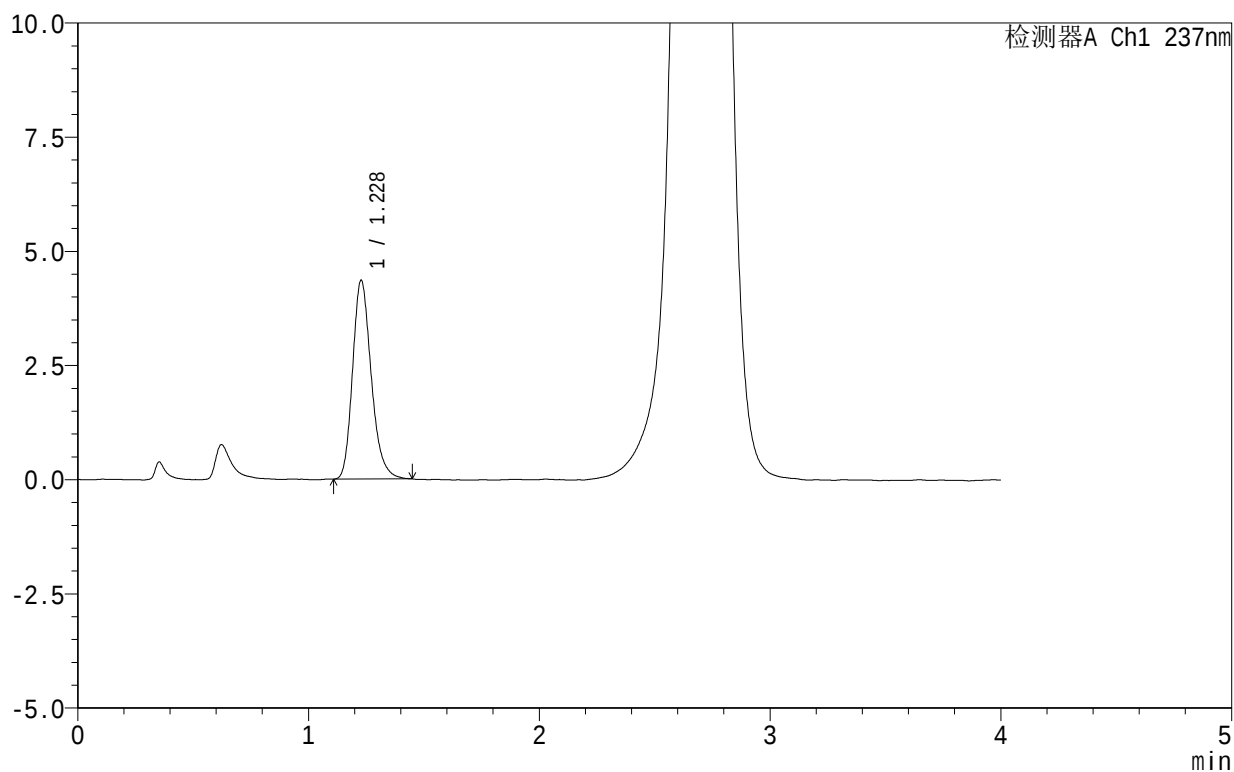

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	24425	100.000	4348	1137	1.230	--
总计		24425	100.000	4348			

图37 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-45min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-268-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:29:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:40:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

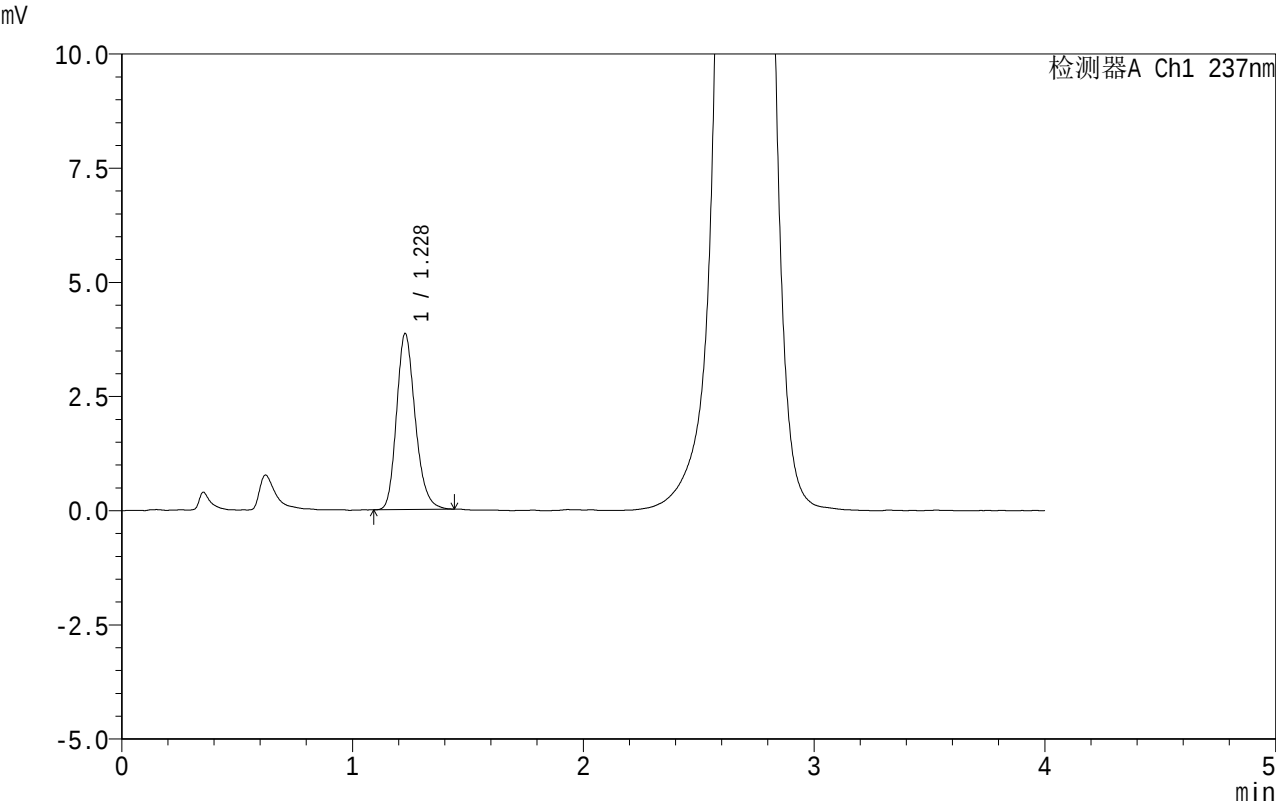

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	21661	100.000	3850	1131	1.213	--
总计		21661	100.000	3850			

图38 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-45min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-269-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:33:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:40:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

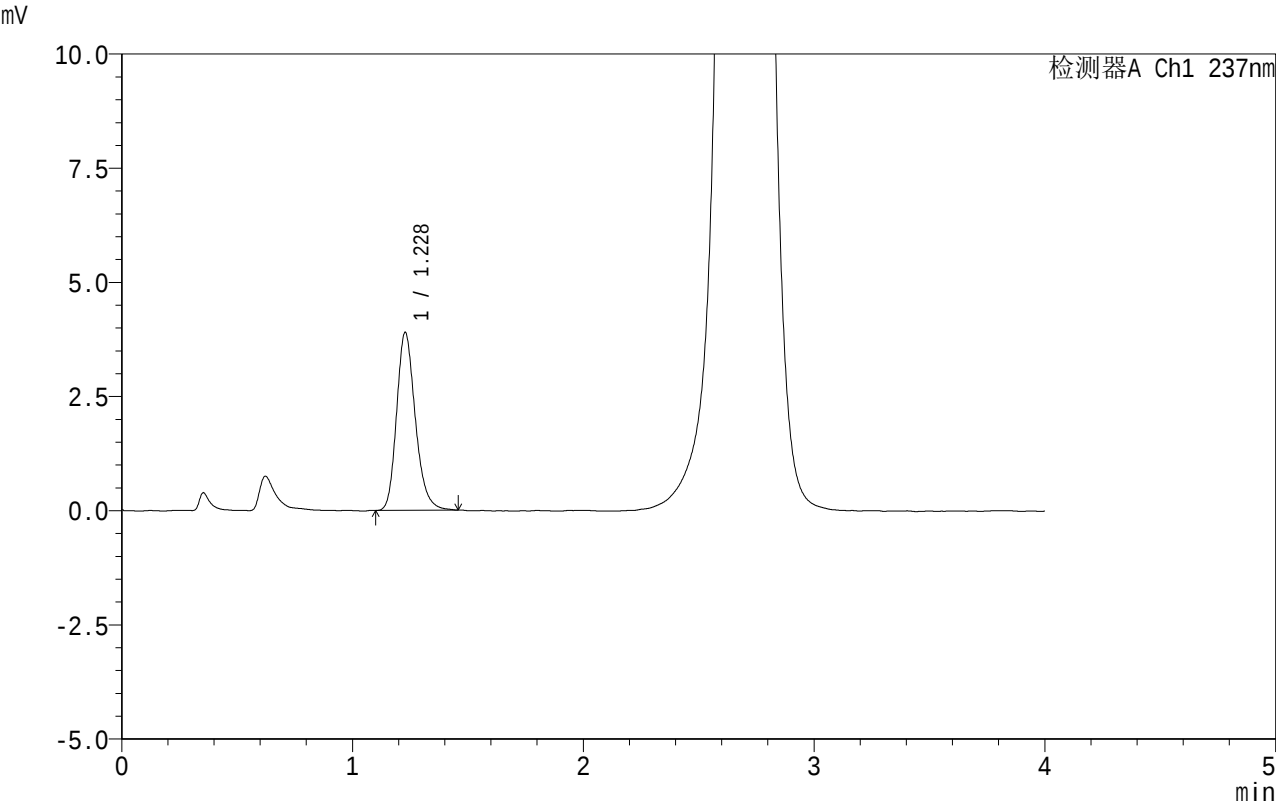

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	21969	100.000	3893	1135	1.221	--
总计		21969	100.000	3893			

图39 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-45min-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-270-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:37:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:40:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

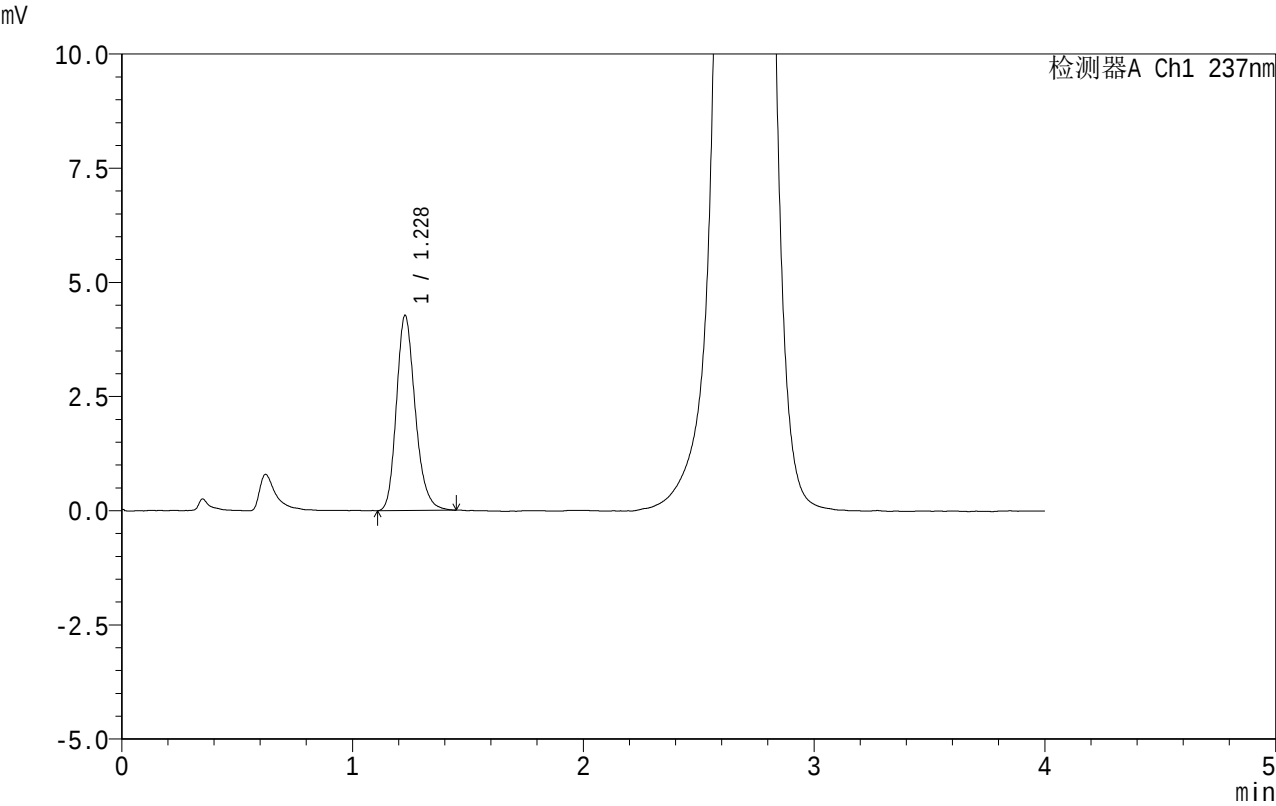

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	24185	100.000	4268	1121	1.220	--
总计		24185	100.000	4268			

图40 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-45min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-271-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:42:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:41:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

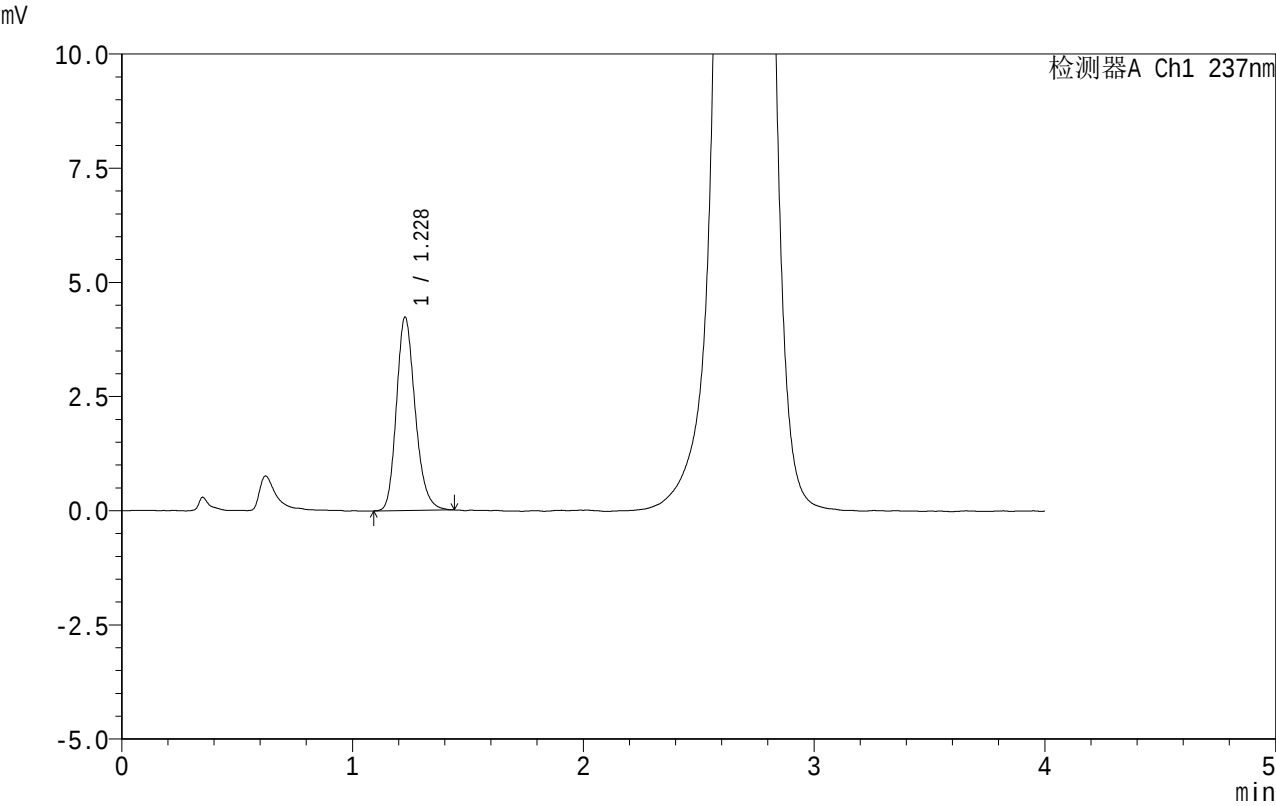

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23861	100.000	4228	1130	1.212	--
总计		23861	100.000	4228			


图41 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-272-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:46:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:41:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

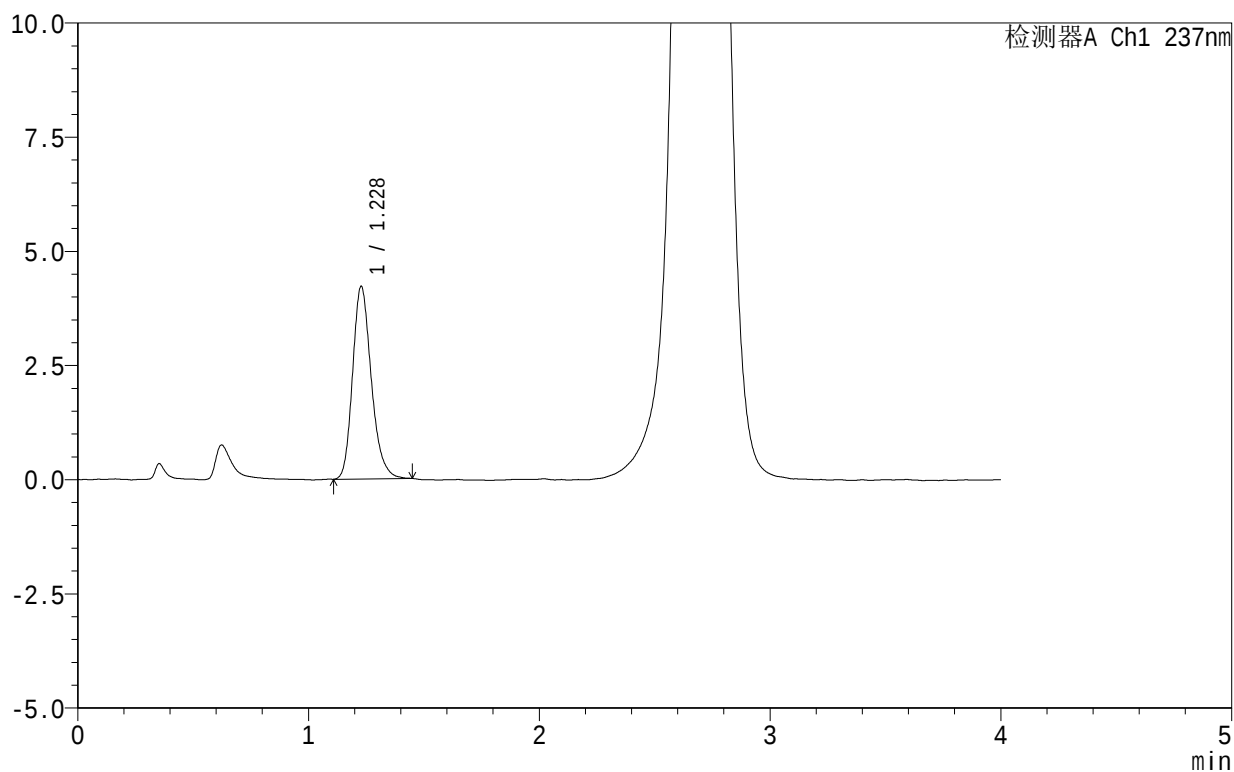

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23723	100.000	4214	1141	1.226	--
总计		23723	100.000	4214			


图42 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-273-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:51:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:41:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

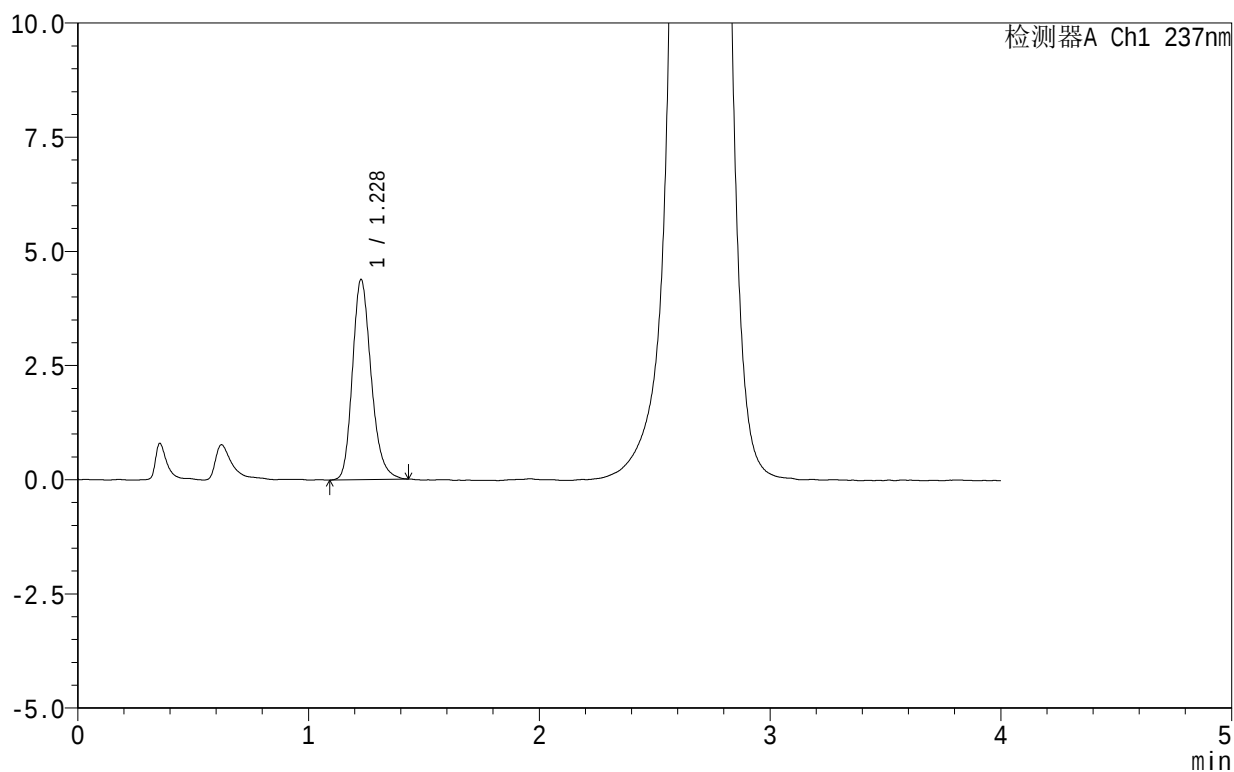

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	24675	100.000	4376	1134	1.221	--
总计		24675	100.000	4376			


图43 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-274-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:55:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:41:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

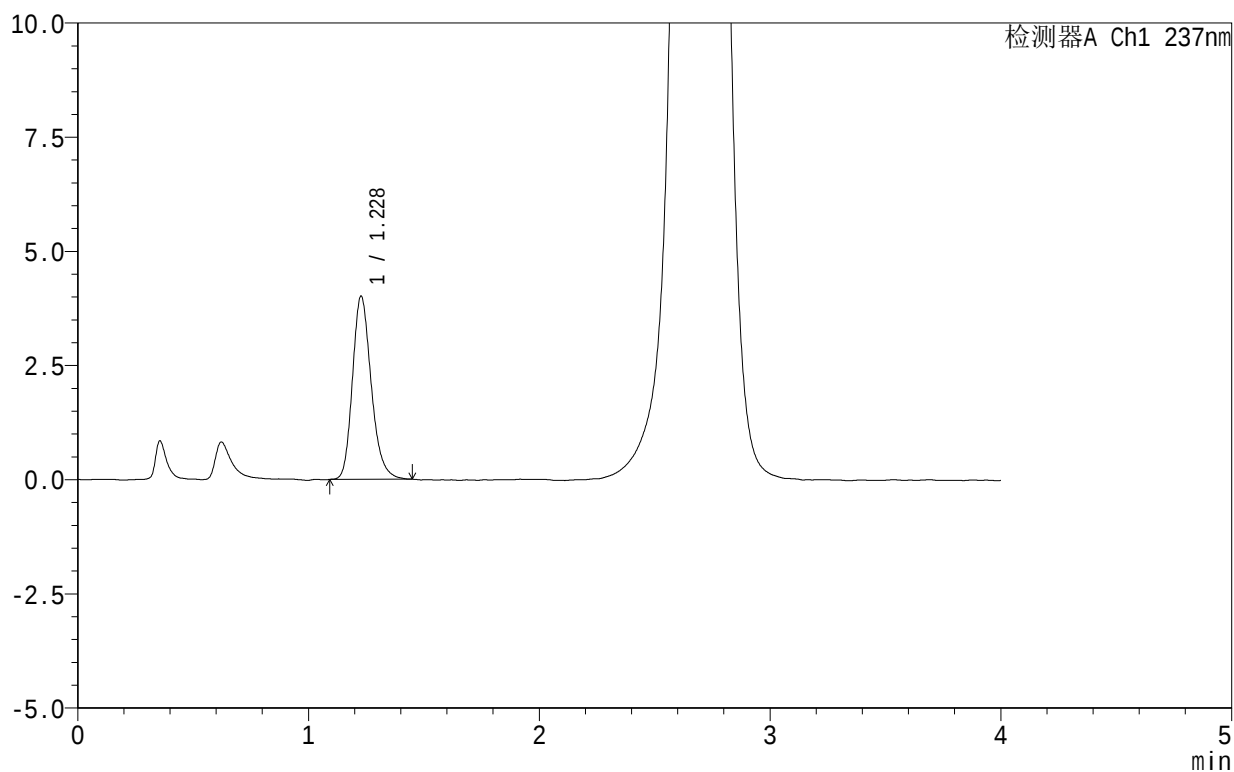

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	22644	100.000	4004	1130	1.223	--
总计		22644	100.000	4004			


图44 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-275-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:59:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:41:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

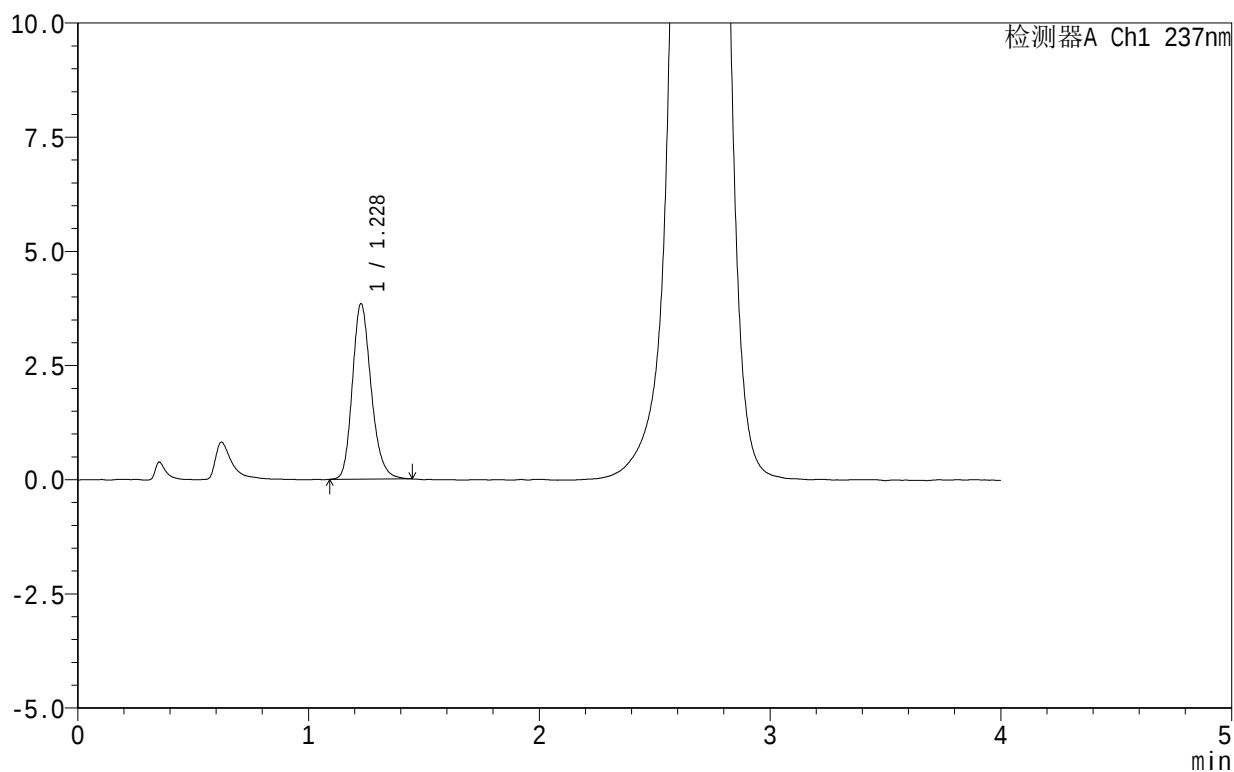

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	21732	100.000	3836	1125	1.213	--
总计		21732	100.000	3836			


图45 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-276-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 19:04:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:41:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

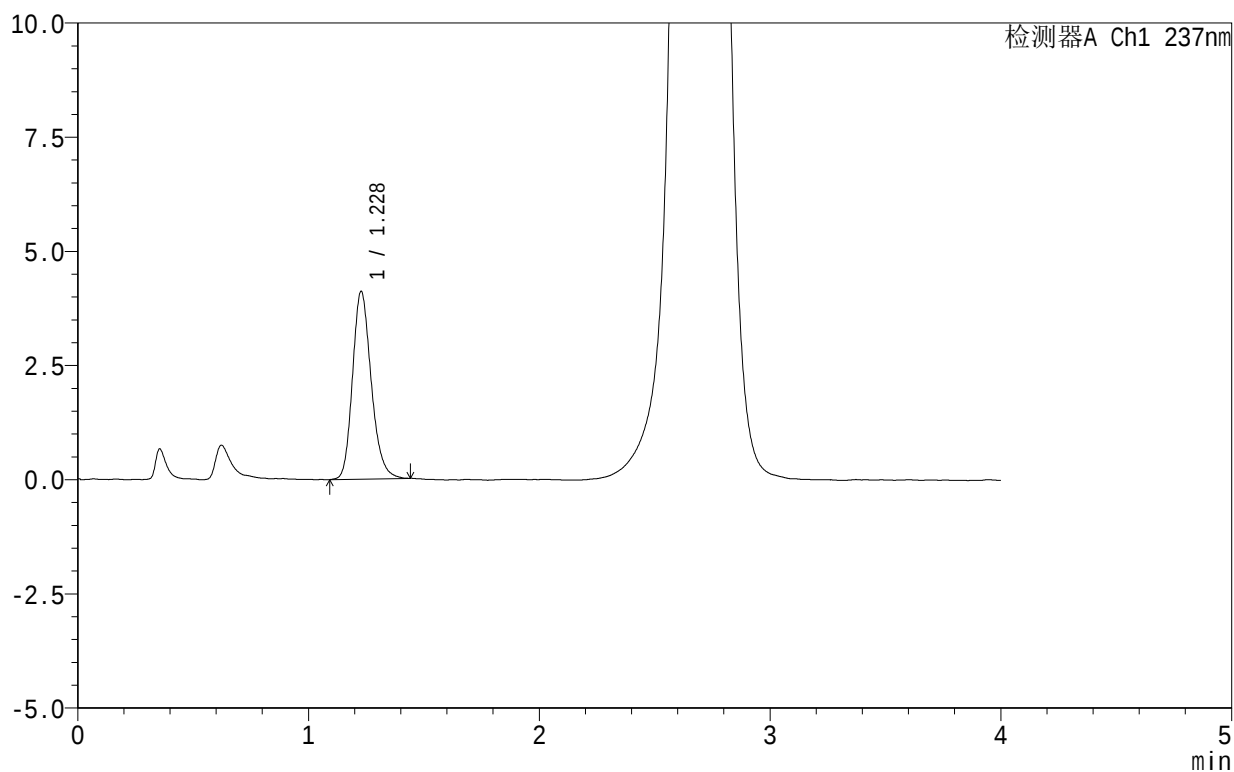

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23140	100.000	4106	1133	1.204	--
总计		23140	100.000	4106			


图46 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-277-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 19:08:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:41:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

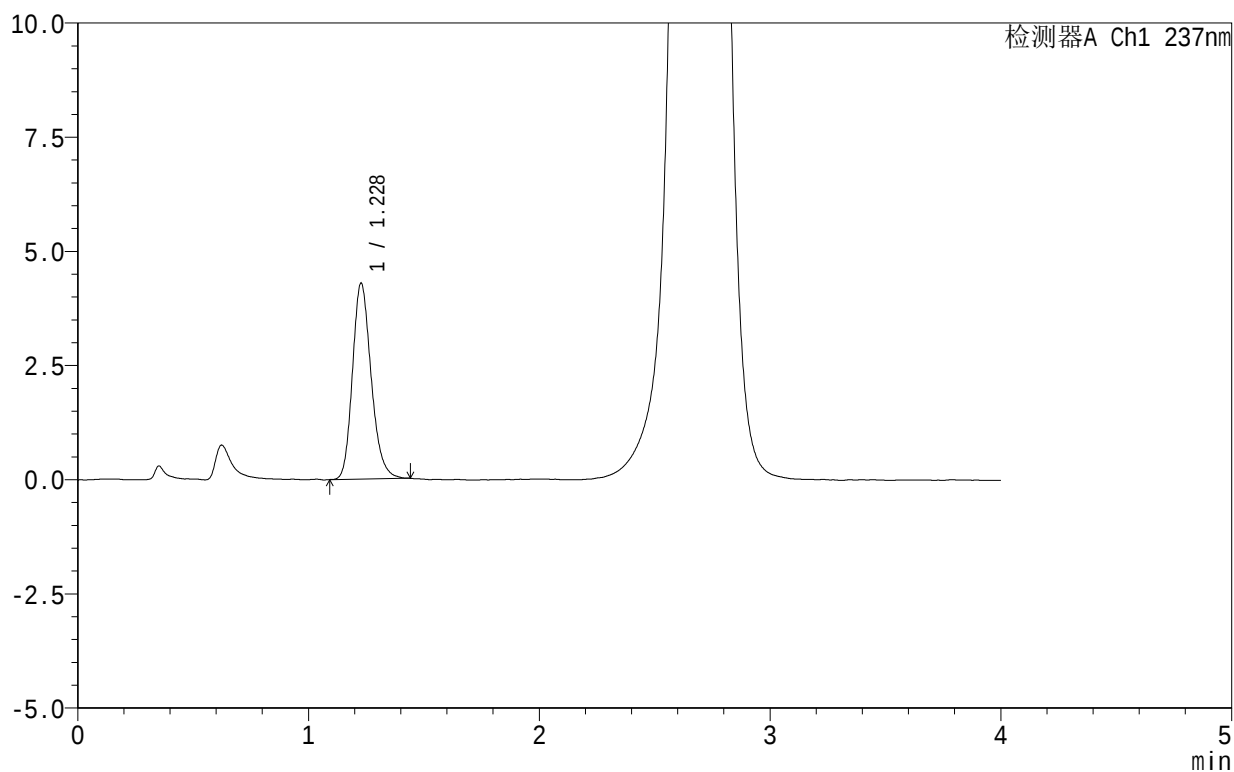

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	24123	100.000	4284	1133	1.208	--
总计		24123	100.000	4284			

图47 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-60min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-278-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:13:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:41:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

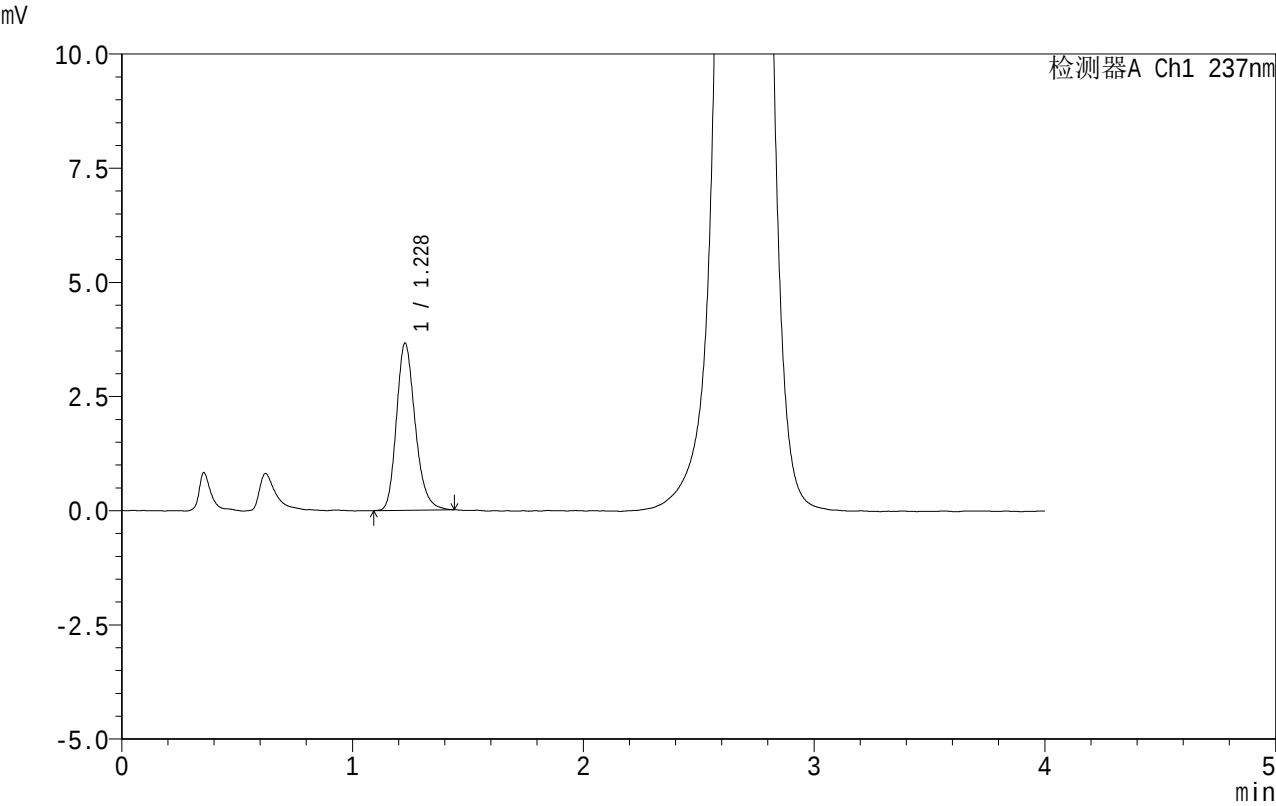

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	20610	100.000	3653	1126	1.222	--
总计		20610	100.000	3653			


图48 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-280-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 19:21:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:41:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

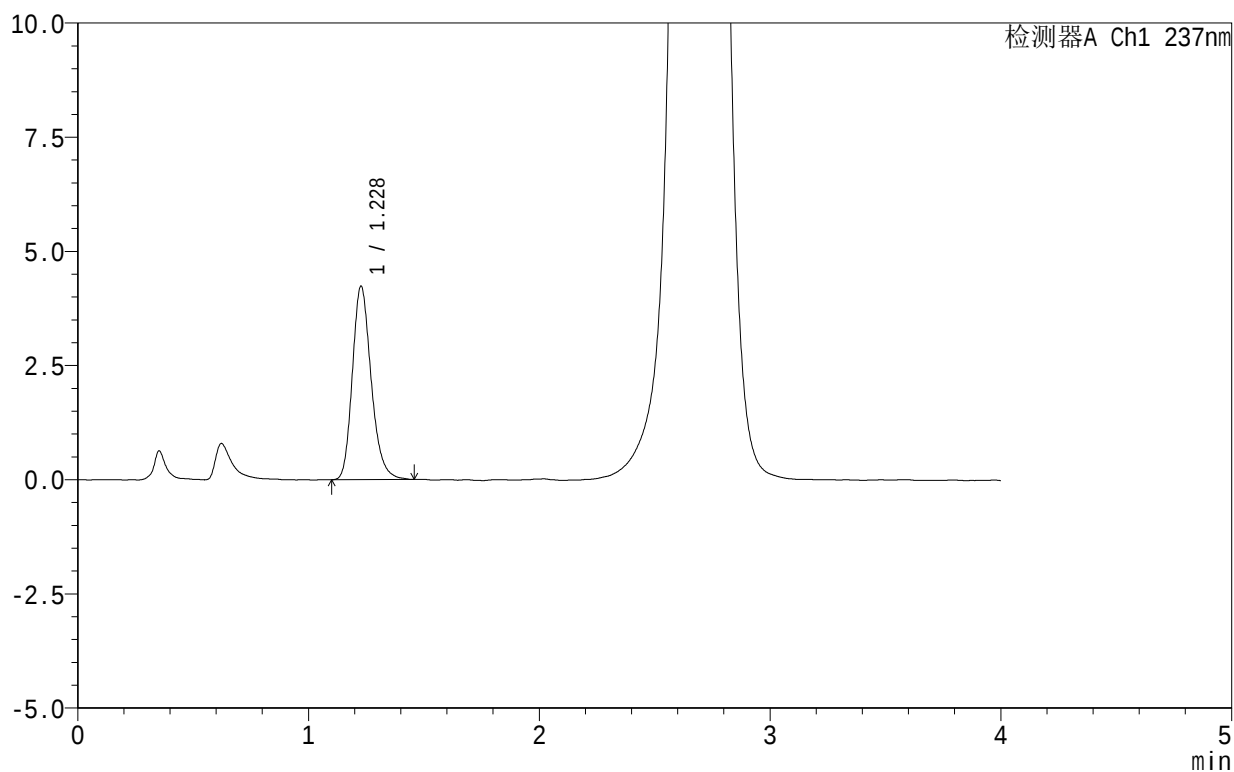

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23966	100.000	4228	1124	1.222	--
总计		23966	100.000	4228			

图49 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-281-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:26:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:41:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

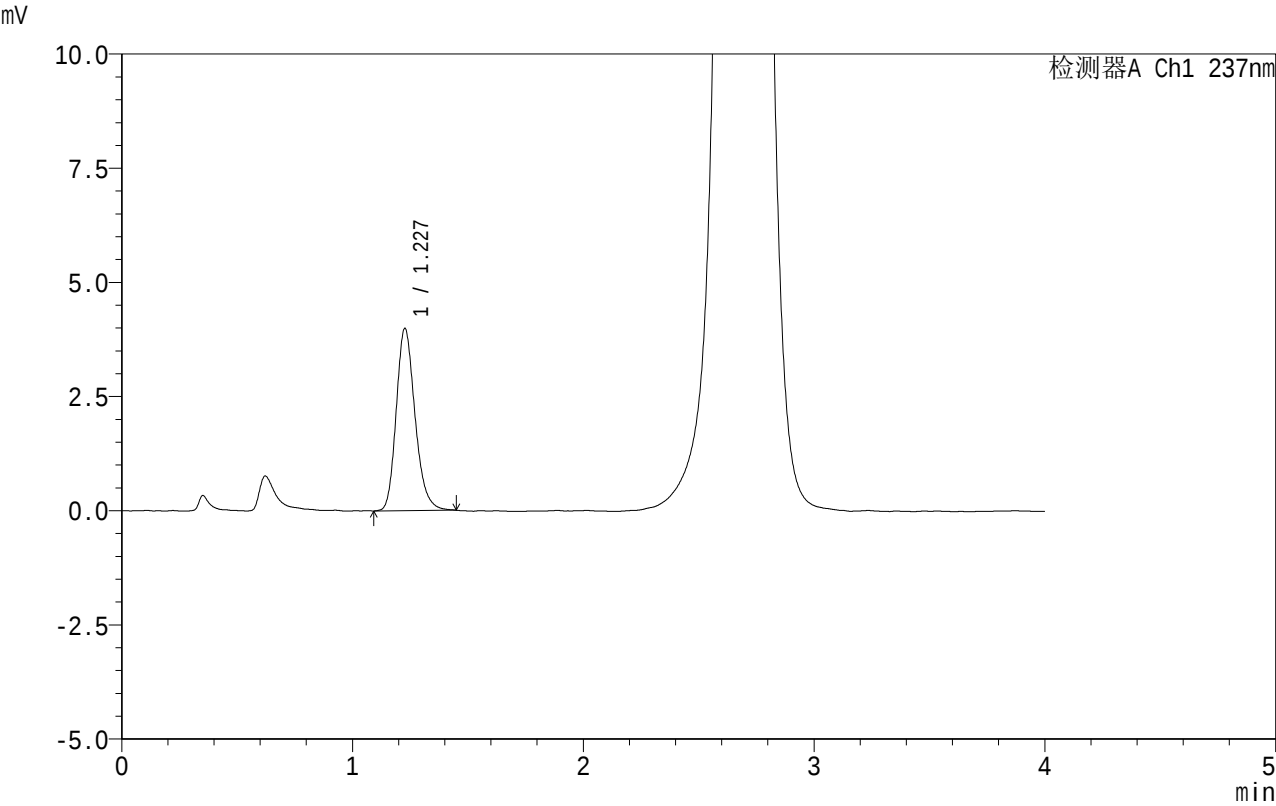

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	22584	100.000	3977	1120	1.216	--
总计		22584	100.000	3977			


图50 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-282-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 19:30:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:41:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

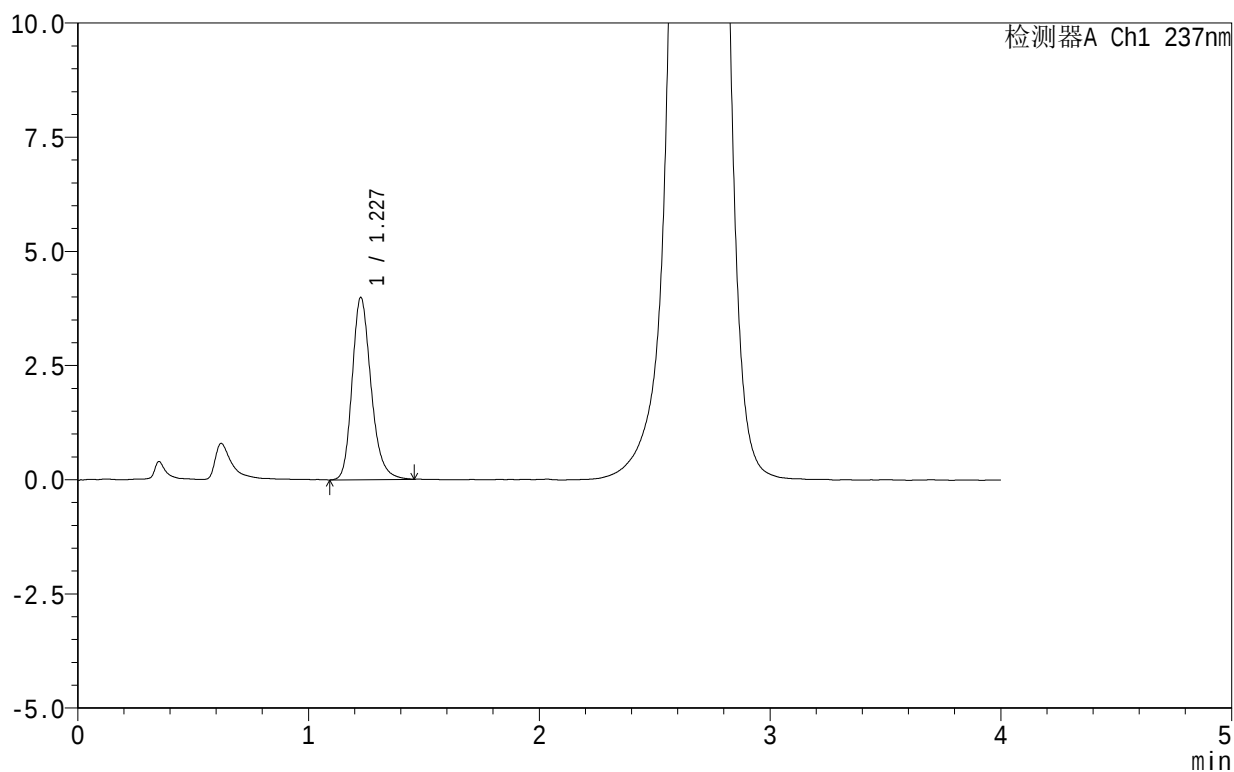

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	22710	100.000	3973	1118	1.231	--
总计		22710	100.000	3973			

图51 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-283-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:35:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:41:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

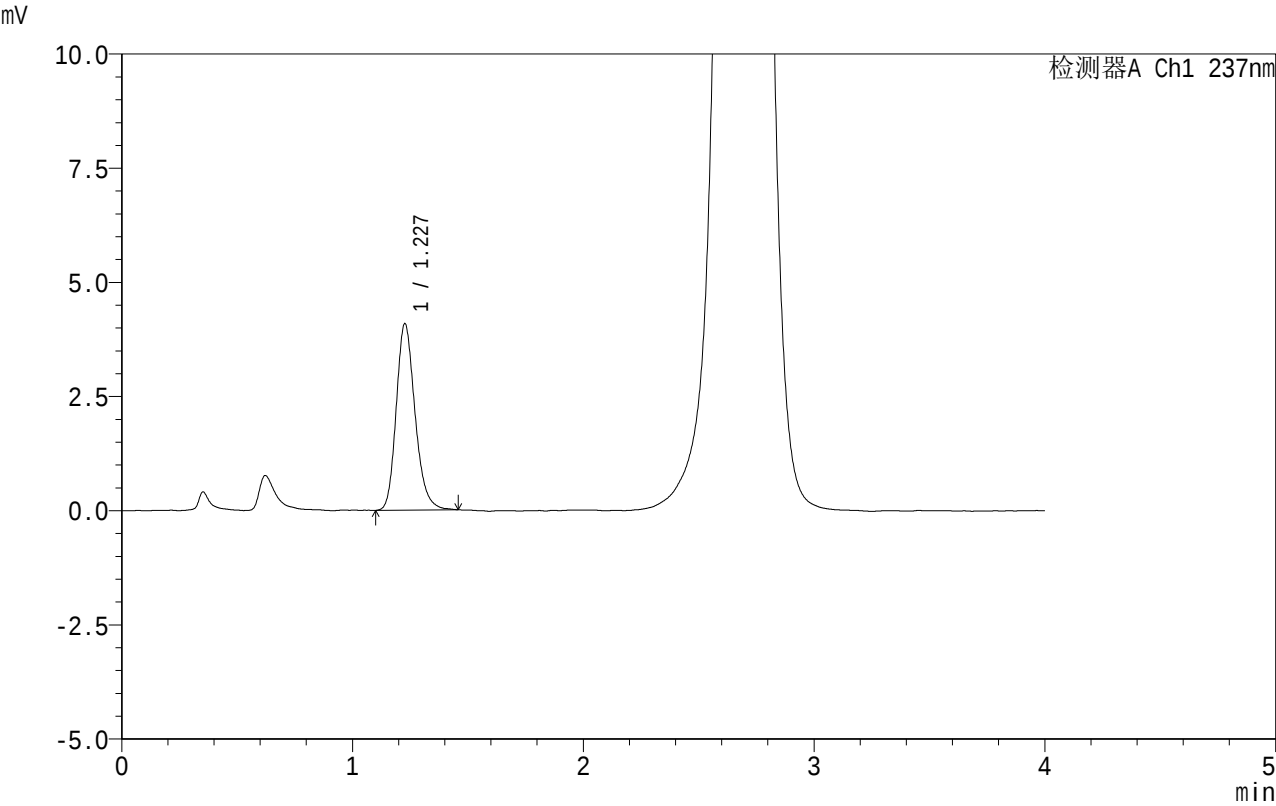

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	23124	100.000	4070	1122	1.212	--
总计		23124	100.000	4070			

图52 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-284-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:39:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:41:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

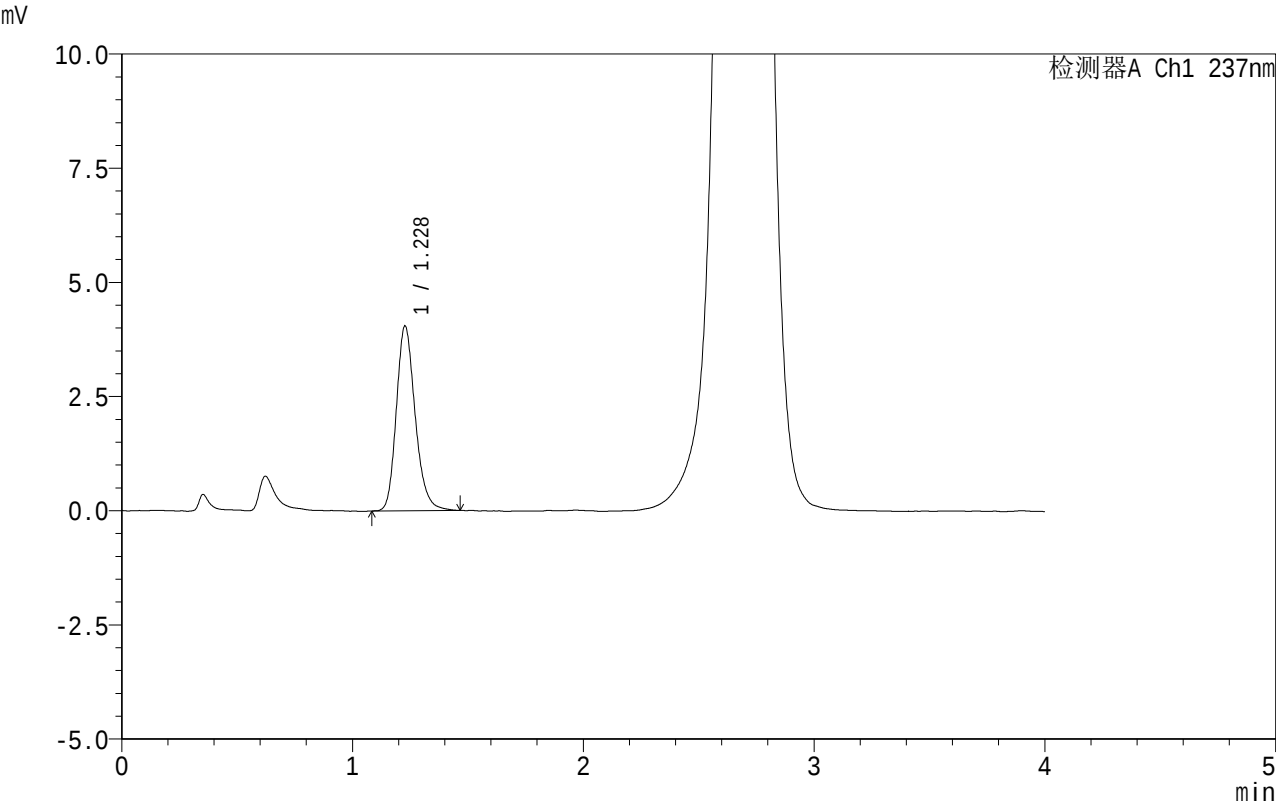

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	22987	100.000	4038	1119	1.215	--
总计		22987	100.000	4038			

图53 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-285-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:43:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:41:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

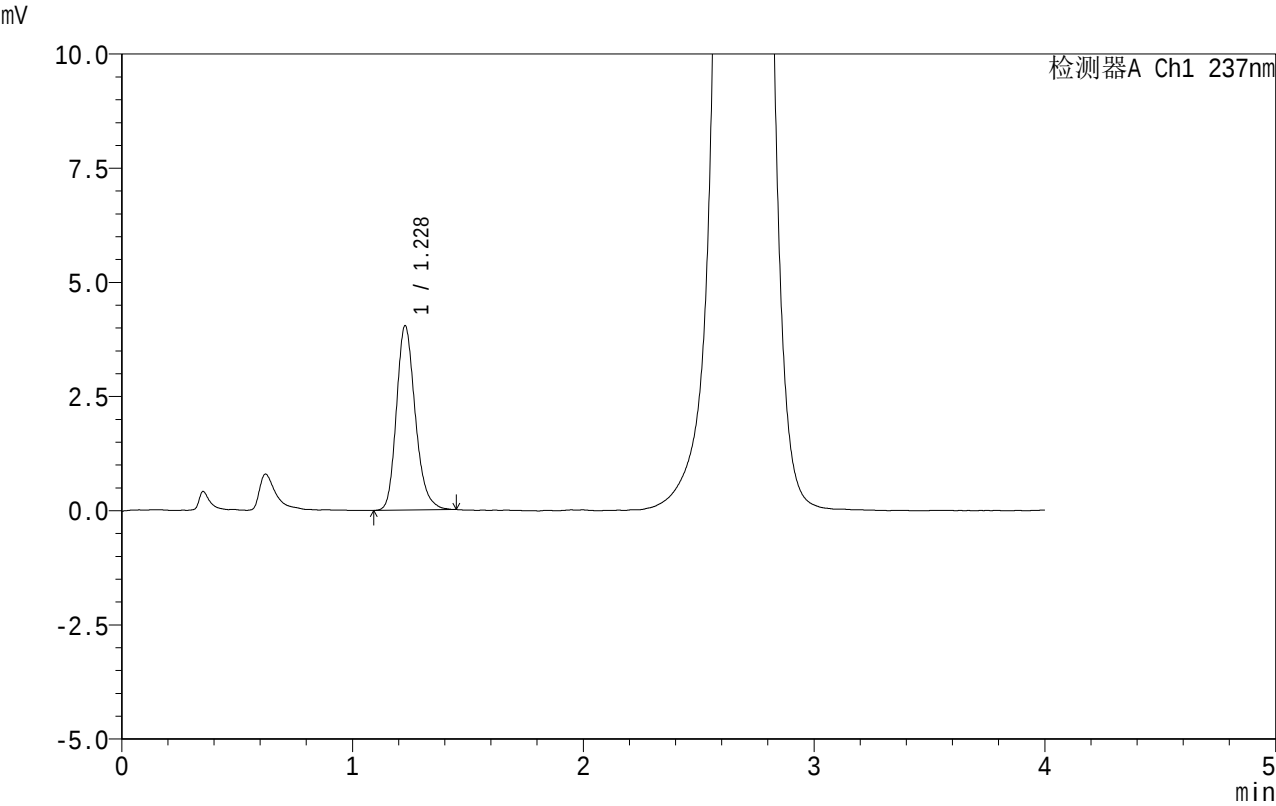

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	22884	100.000	4032	1124	1.220	--
总计		22884	100.000	4032			

图54 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-286-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:48:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:41:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

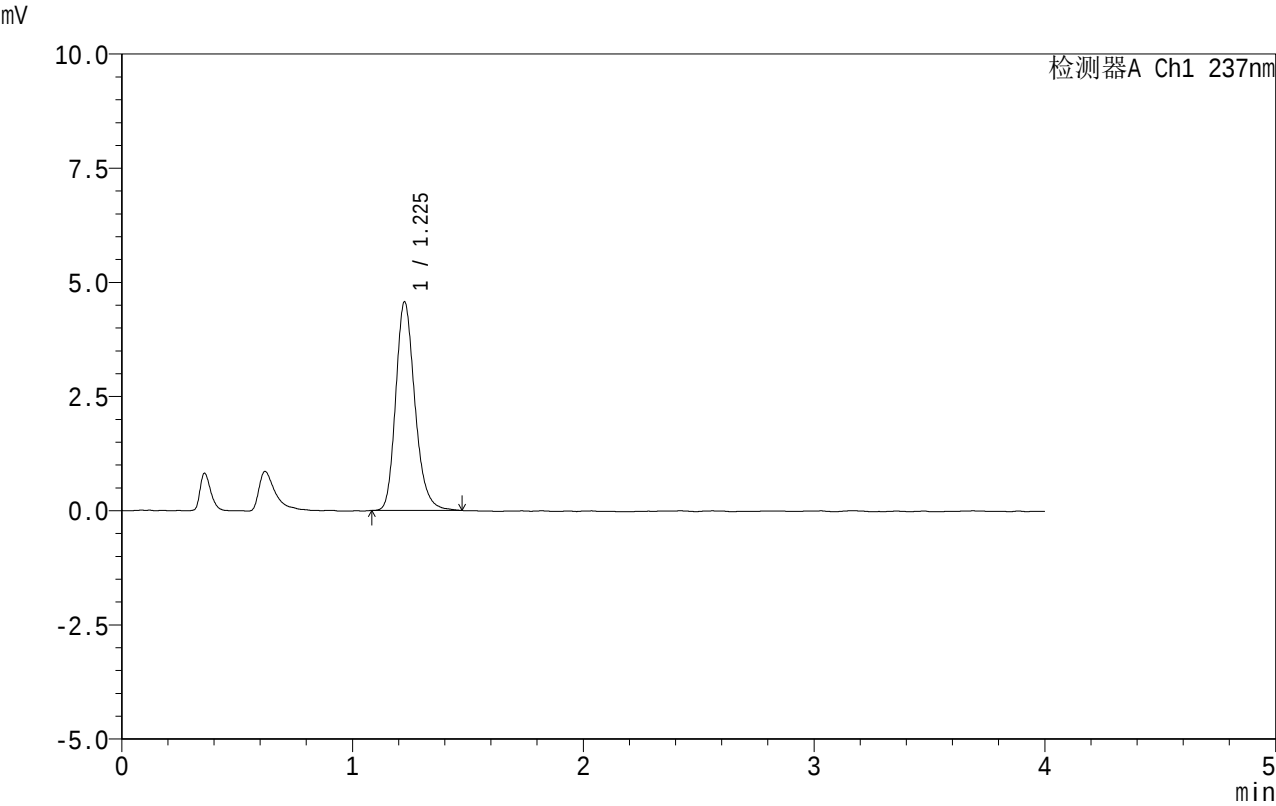

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	26362	100.000	4546	1081	1.221	--
总计		26362	100.000	4546			


图55 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-287-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-1-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 19:52:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:41:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

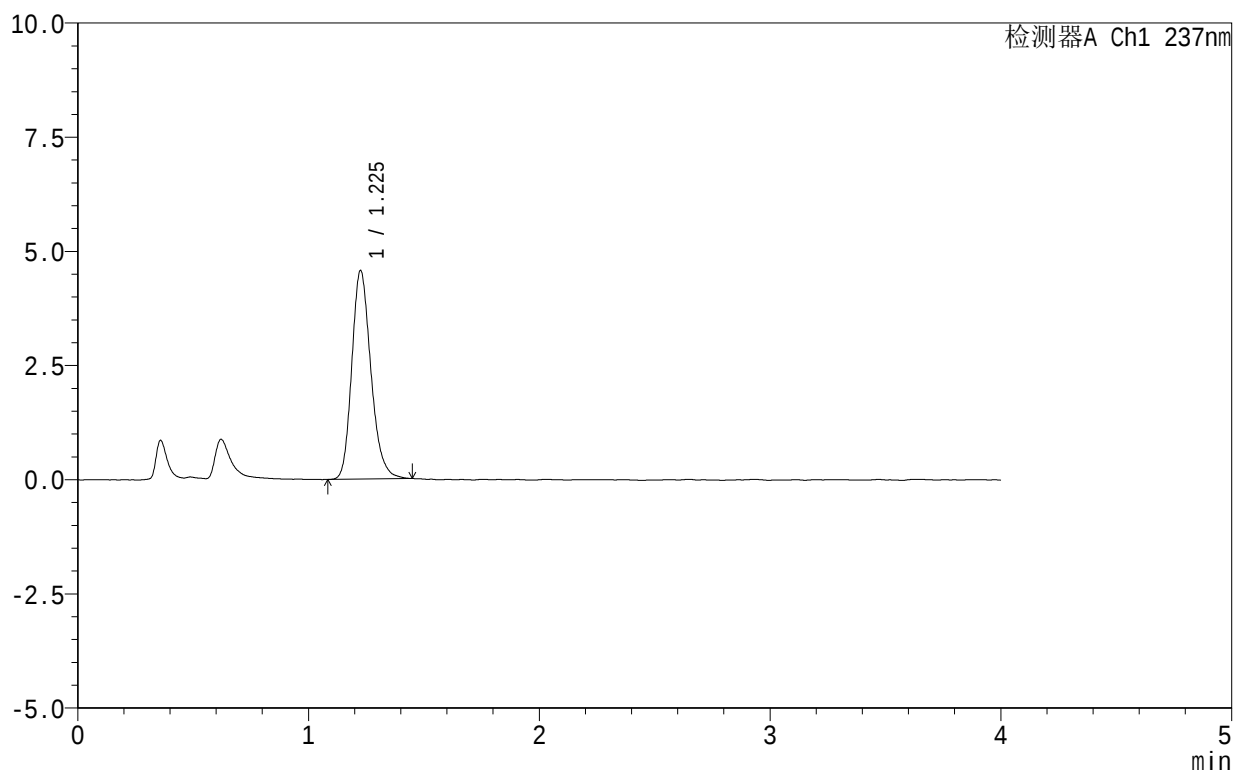

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	26229	100.000	4546	1079	1.220	--
总计		26229	100.000	4546			

图56 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-2-2




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-288-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:57:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:41:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

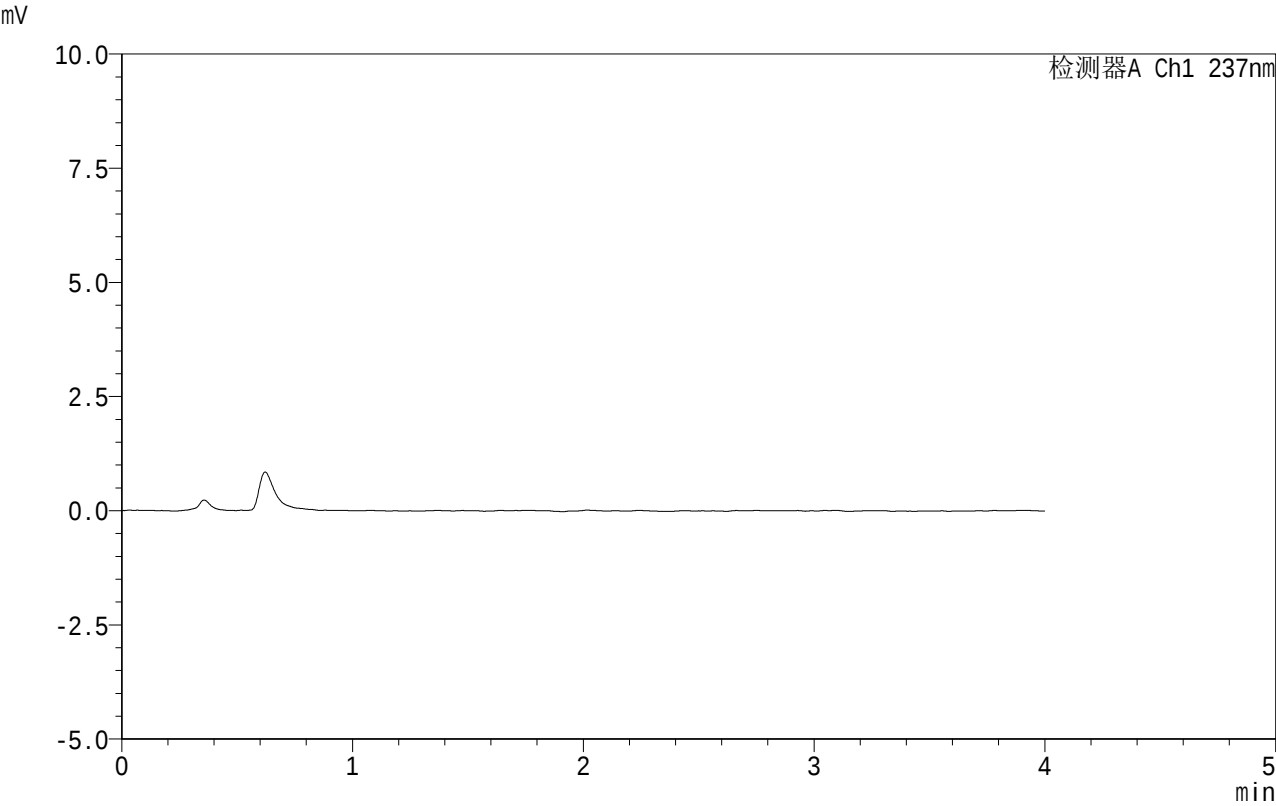

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图57 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-289-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:01:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:41:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

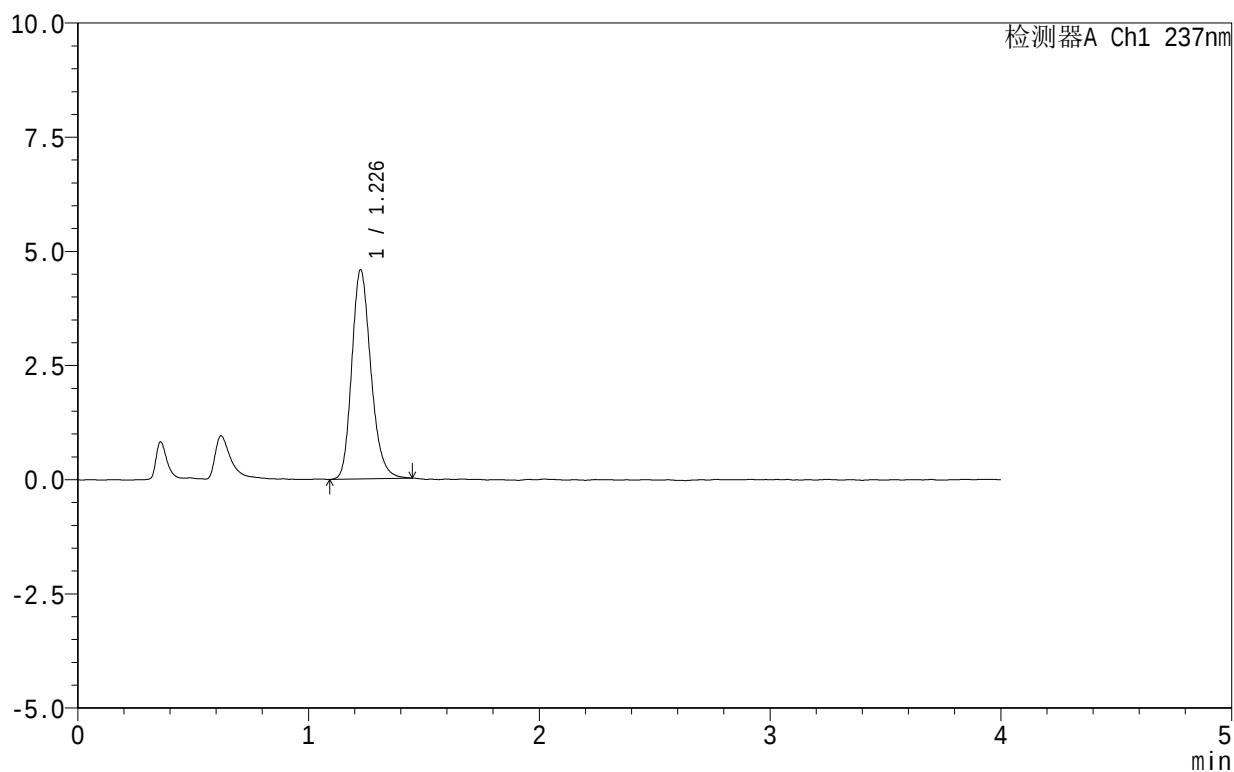

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	26303	100.000	4554	1080	1.214	--
总计		26303	100.000	4554			


图58 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-290-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:05:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:41:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

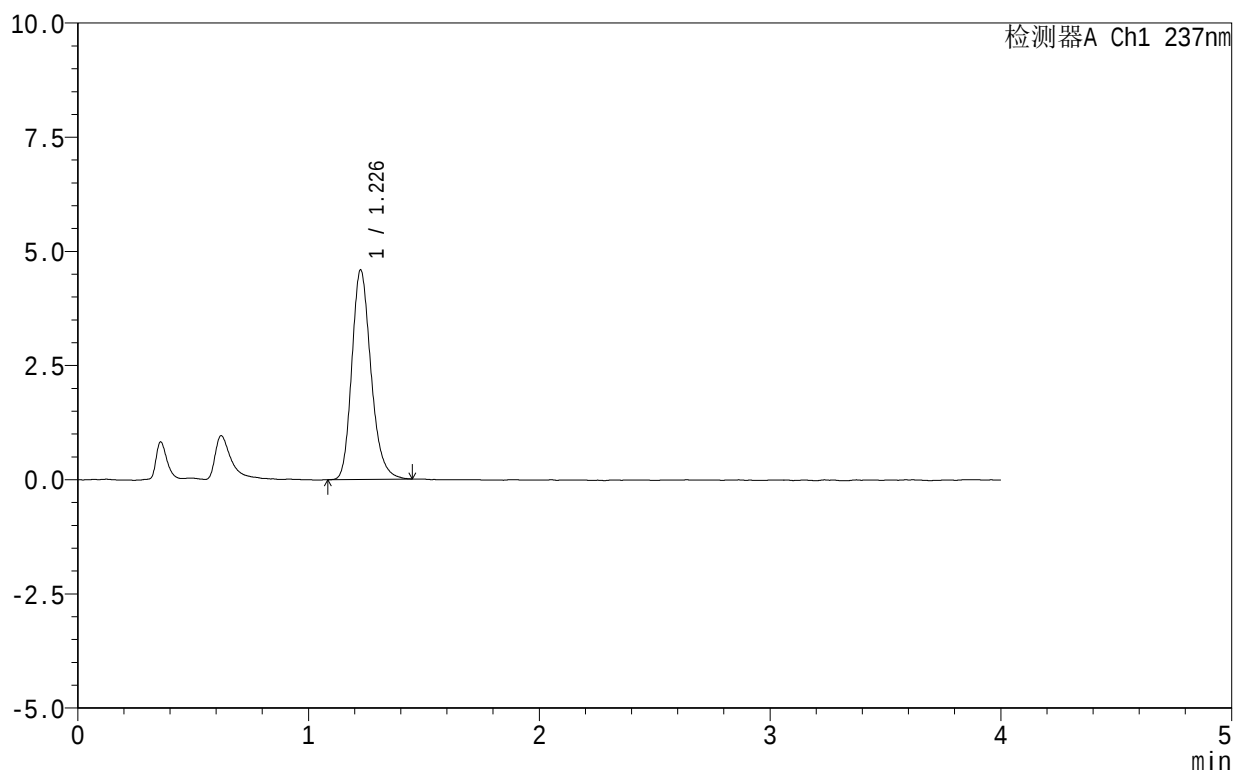

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	26369	100.000	4558	1079	1.225	--
总计		26369	100.000	4558			


图59 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-291-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:10:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:41:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

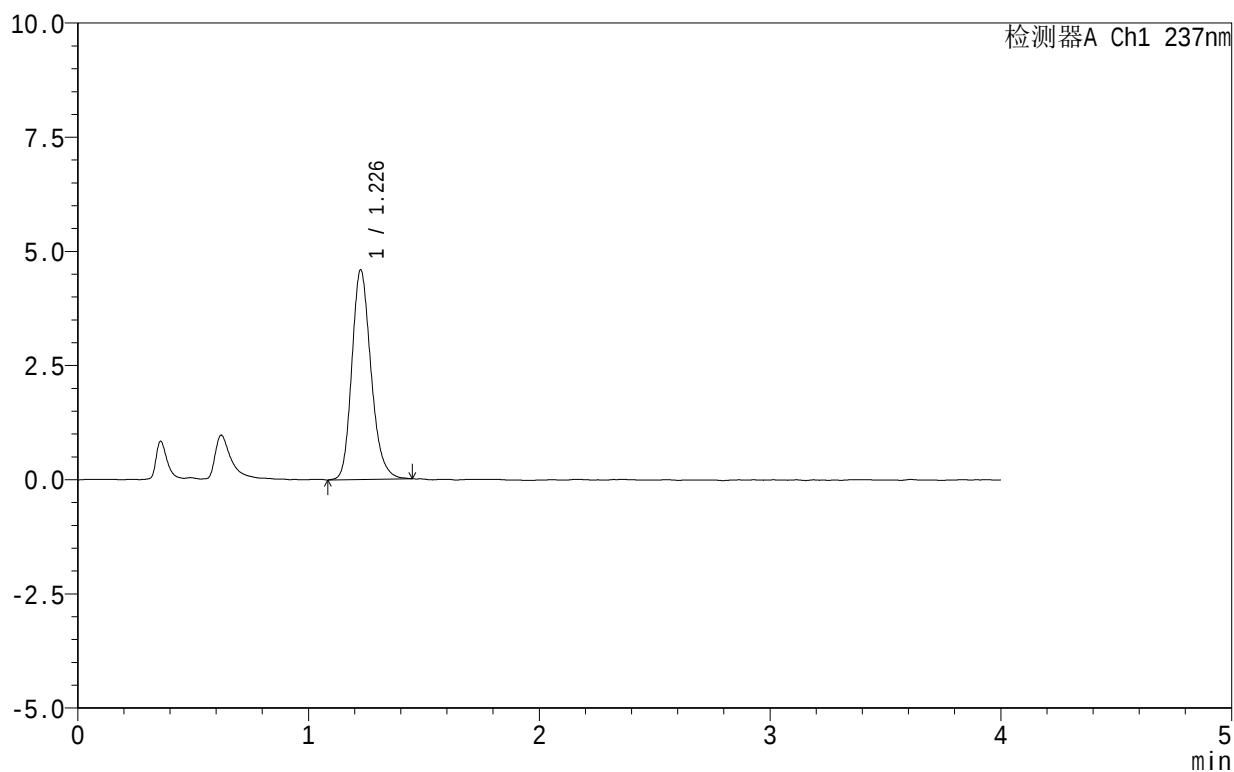

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	26428	100.000	4564	1074	1.214	--
总计		26428	100.000	4564			


图60 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-292-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:14:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:41:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

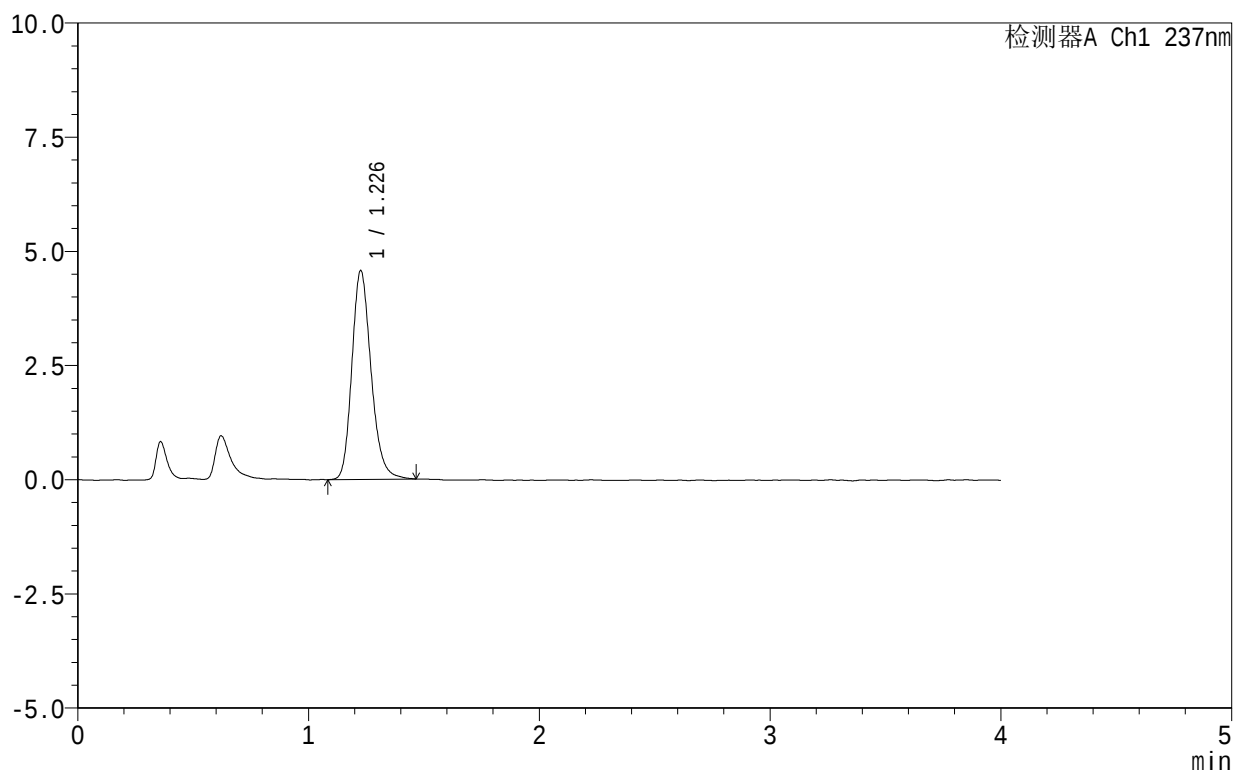

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	26399	100.000	4550	1077	1.213	--
总计		26399	100.000	4550			


图61 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-293-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:19:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:42:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

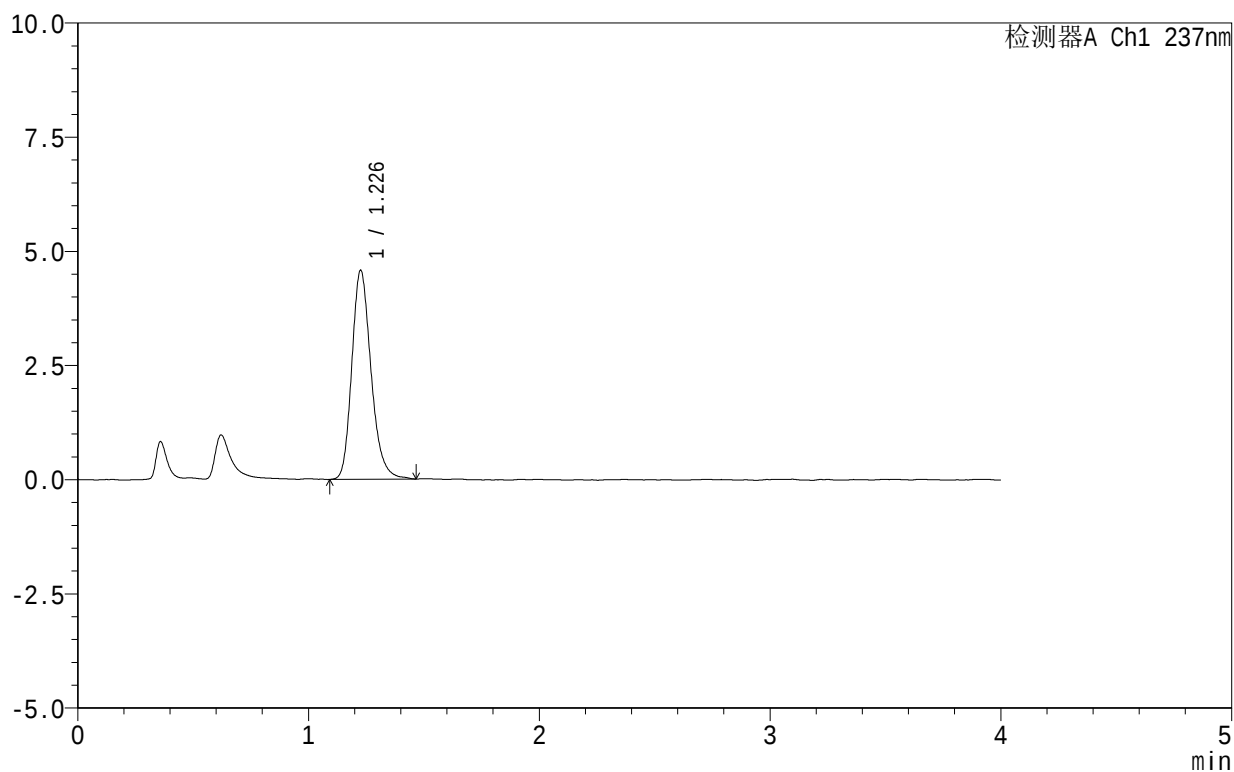

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	26492	100.000	4550	1071	1.223	--
总计		26492	100.000	4550			


图62 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-294-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:23:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:42:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

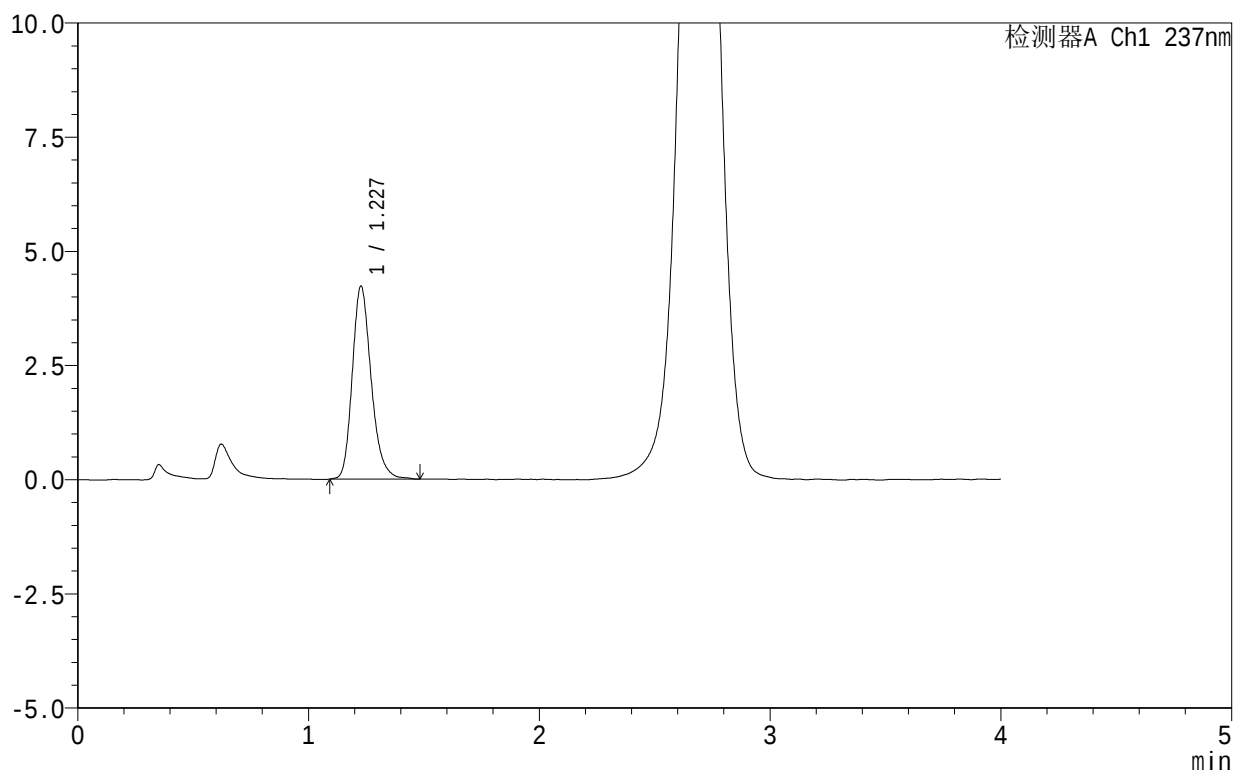

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	24078	100.000	4217	1119	1.227	--
总计		24078	100.000	4217			

图63 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-5min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-295-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:27:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:42:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

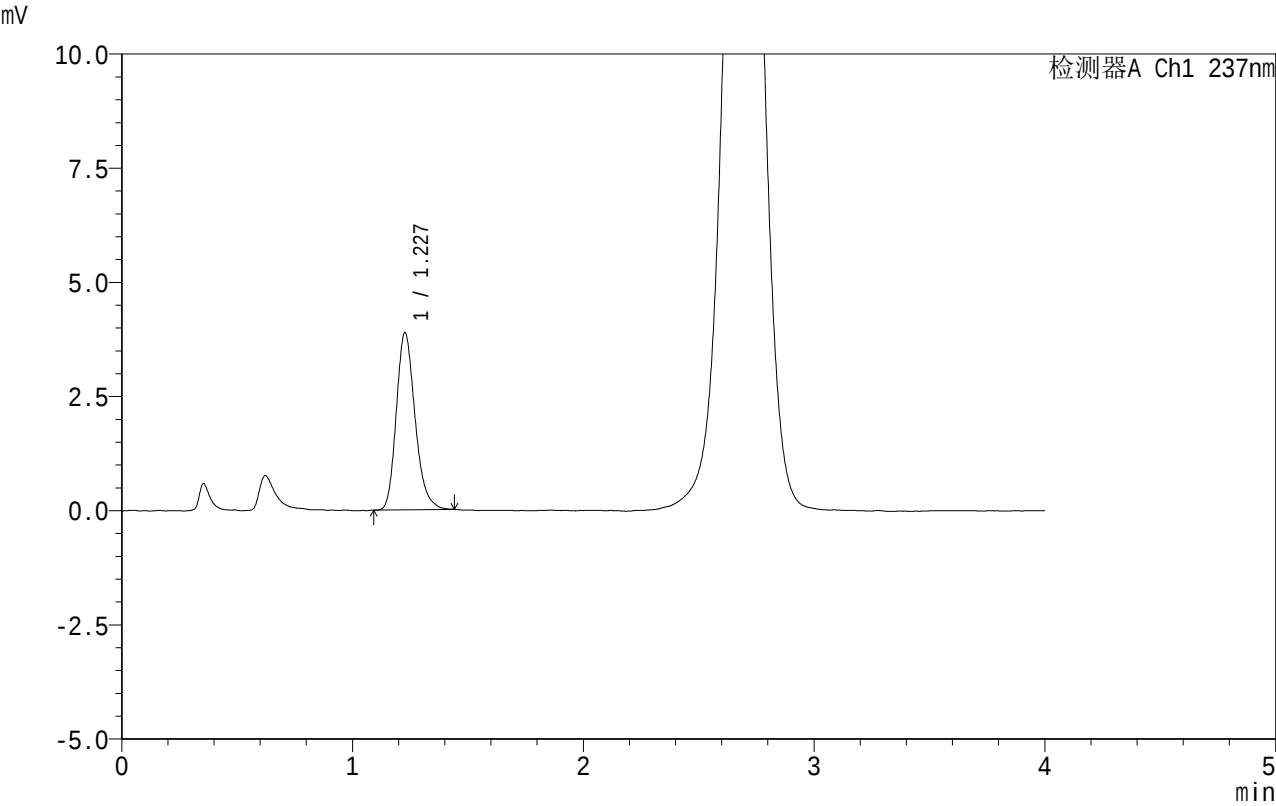

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	21891	100.000	3869	1121	1.223	--
总计		21891	100.000	3869			


图64 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-296-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:32:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:42:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

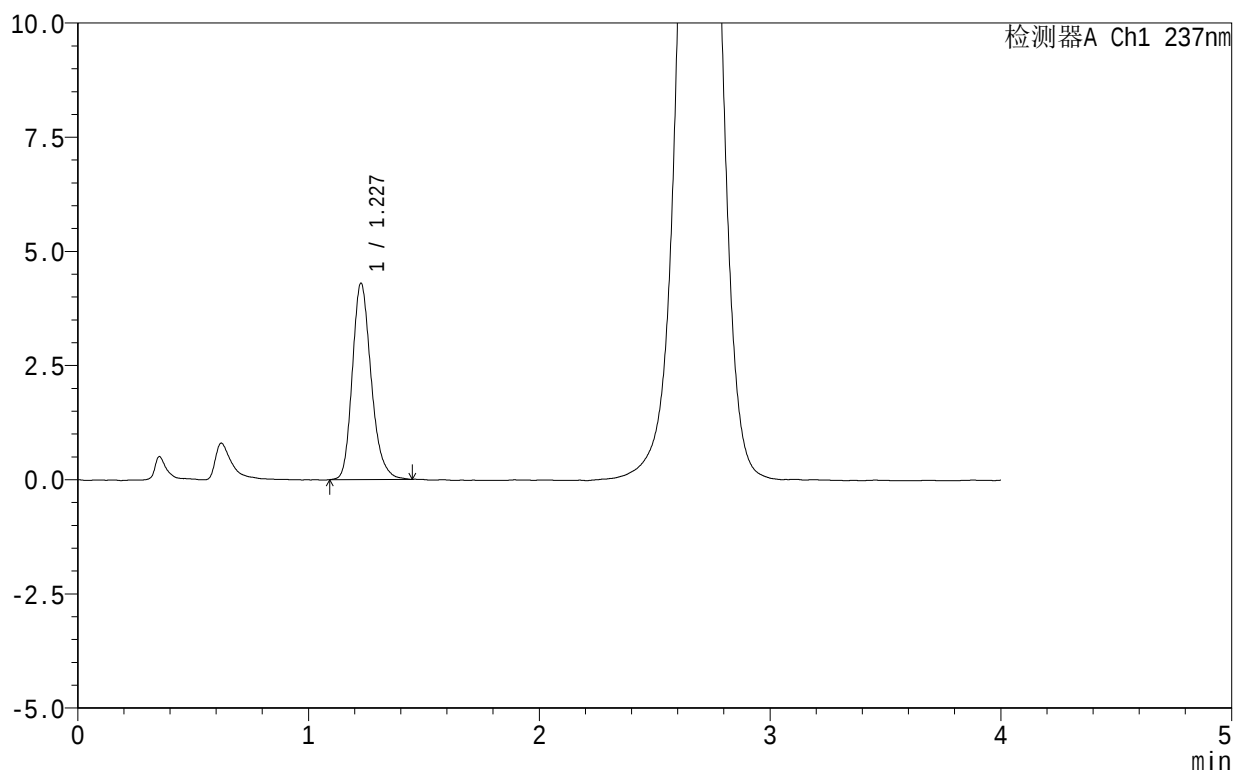

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	24396	100.000	4291	1120	1.228	--
总计		24396	100.000	4291			


图65 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-297-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:36:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:42:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

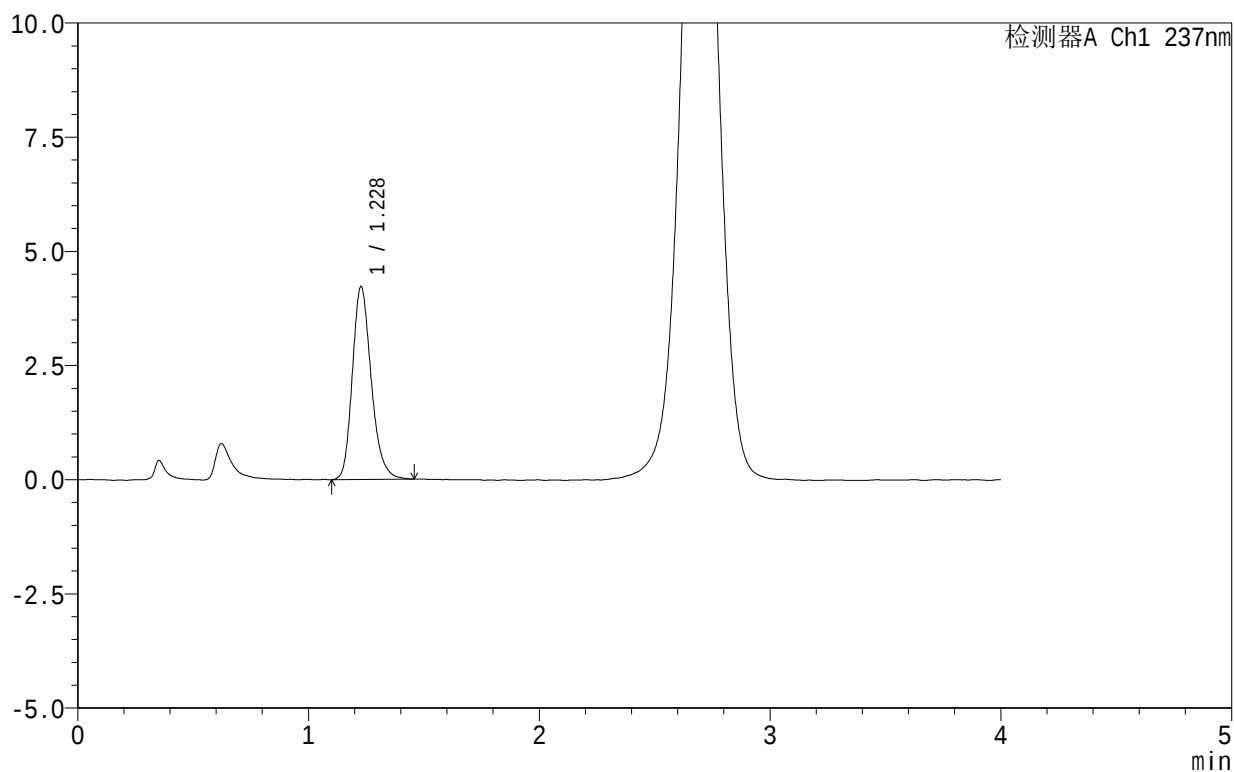

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	24064	100.000	4217	1113	1.224	--
总计		24064	100.000	4217			


图66 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-298-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:41:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:42:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

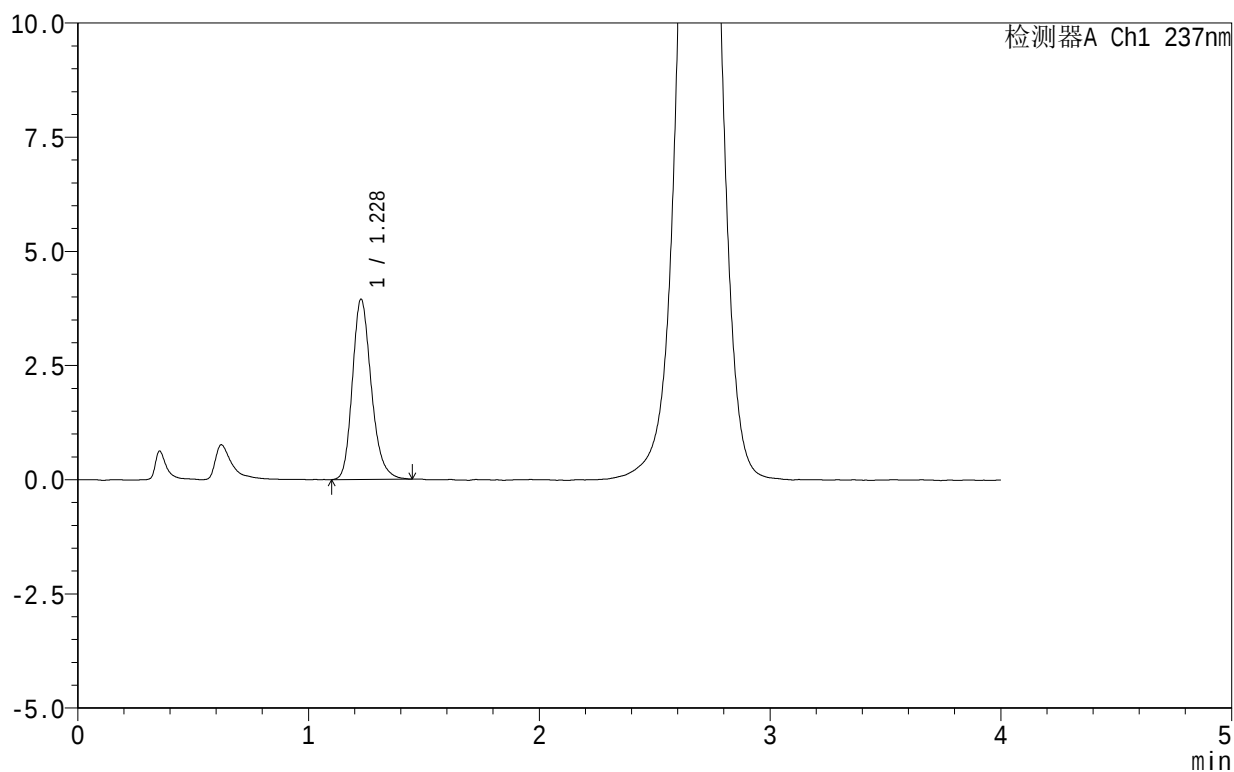

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	22458	100.000	3942	1118	1.224	--
总计		22458	100.000	3942			

图67 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-5min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-299-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:45:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:42:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

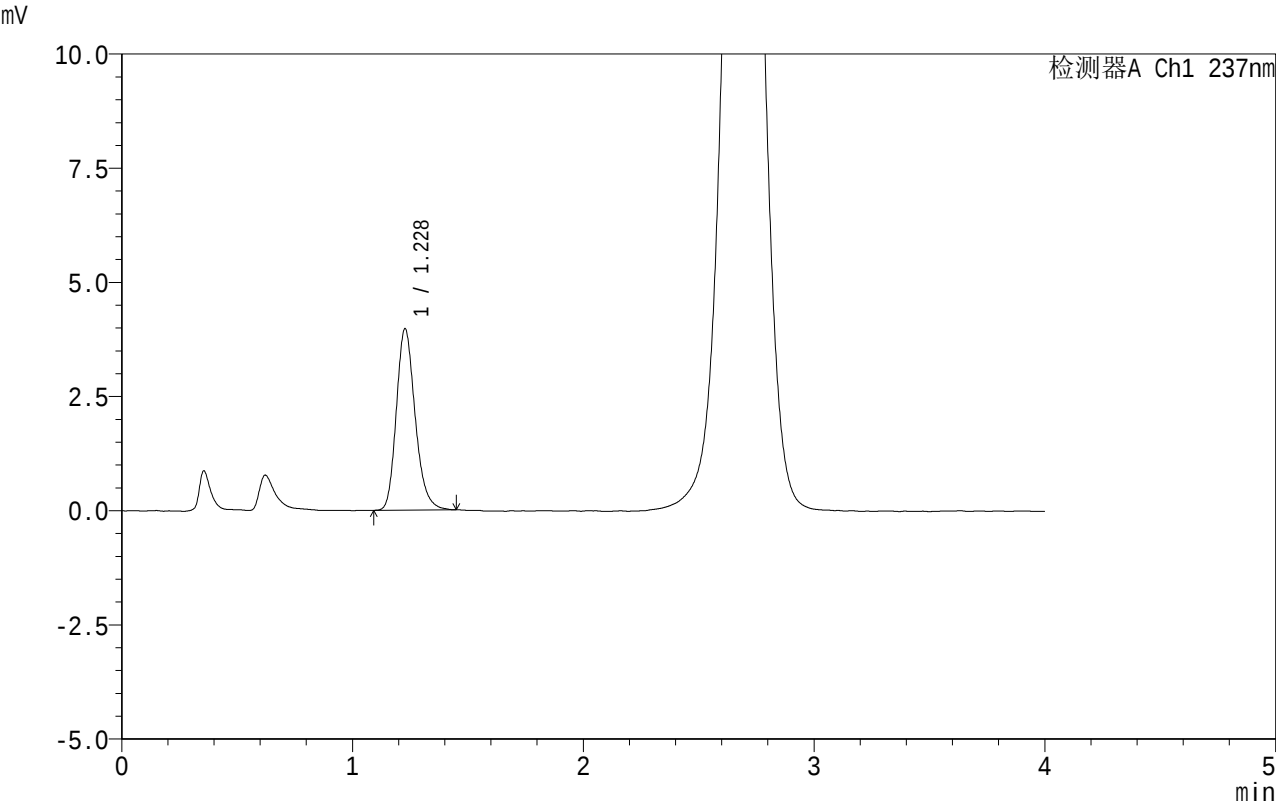

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	22475	100.000	3966	1124	1.215	--
总计		22475	100.000	3966			


图68 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-300-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:49:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:42:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

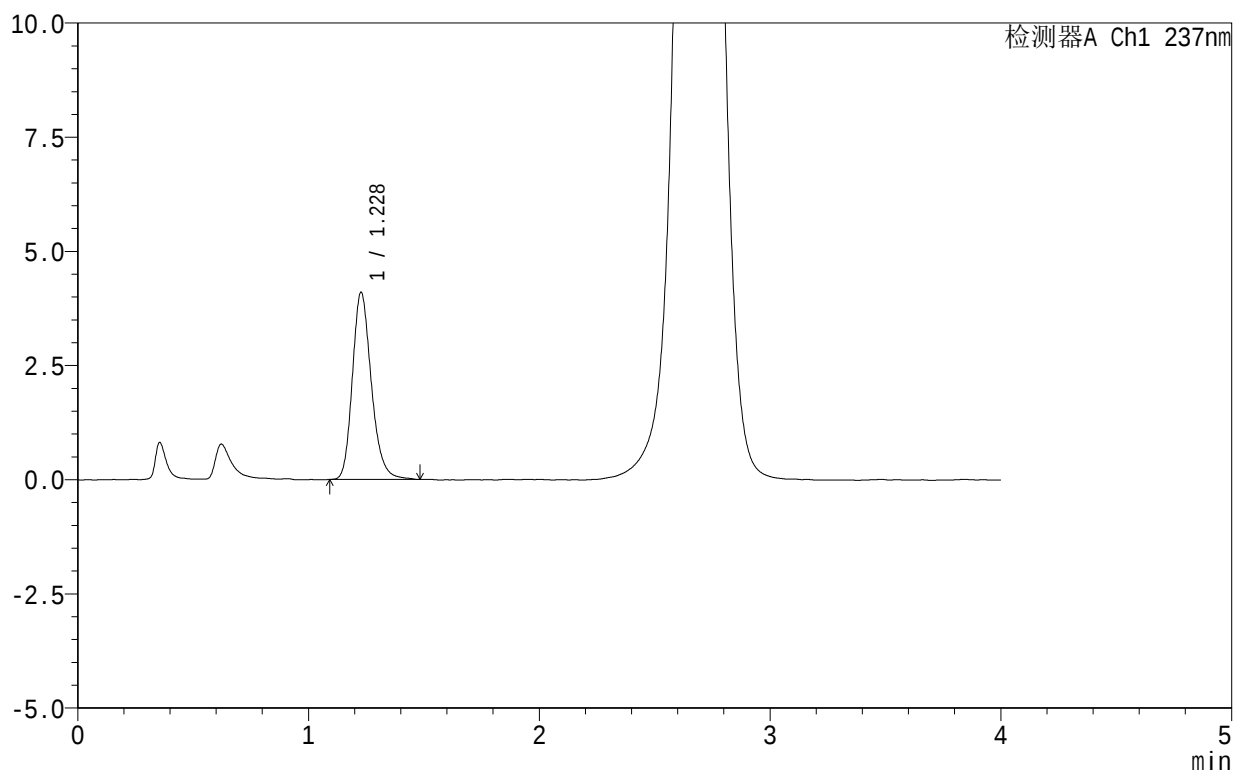

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23387	100.000	4091	1110	1.219	--
总计		23387	100.000	4091			


图69 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-301-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:54:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:42:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

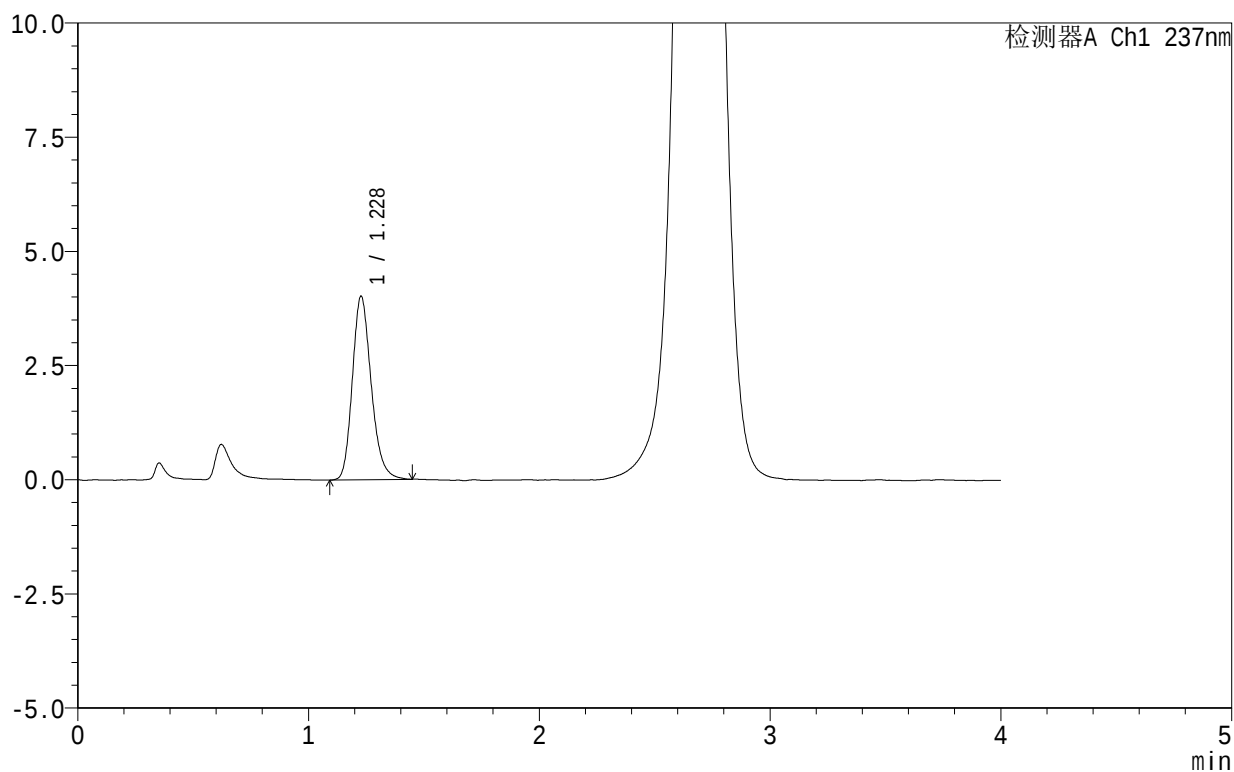

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	22835	100.000	4014	1108	1.215	--
总计		22835	100.000	4014			


图70 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-302-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:58:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:42:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

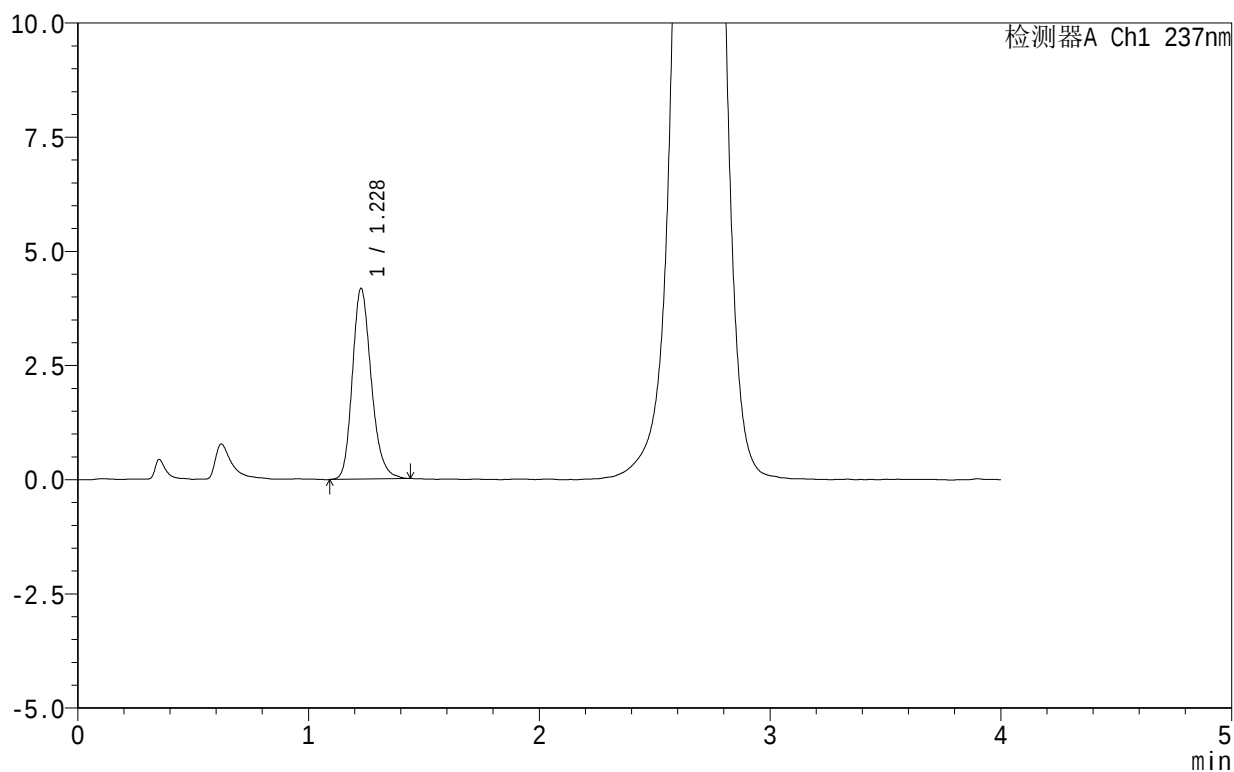

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23719	100.000	4170	1114	1.214	--
总计		23719	100.000	4170			


图71 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-303-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:03:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:42:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

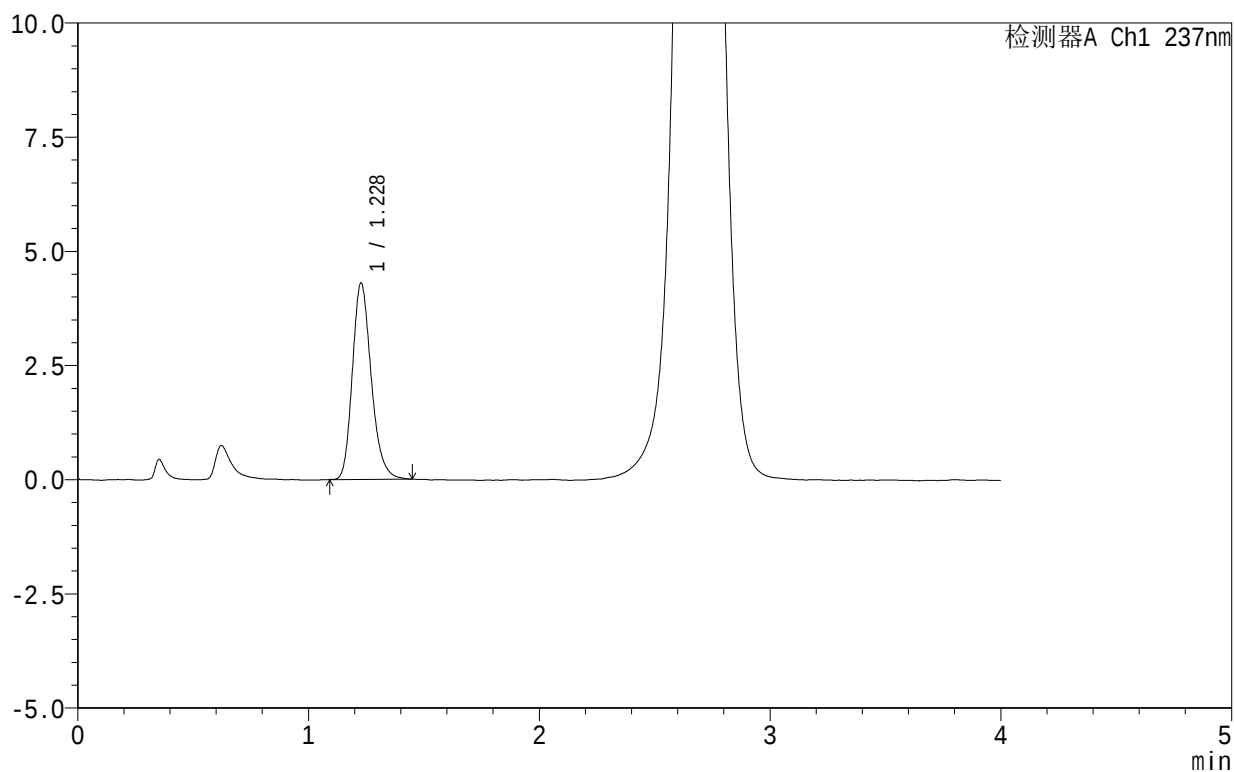

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	24382	100.000	4292	1115	1.221	--
总计		24382	100.000	4292			


图72 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-304-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:07:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:42:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

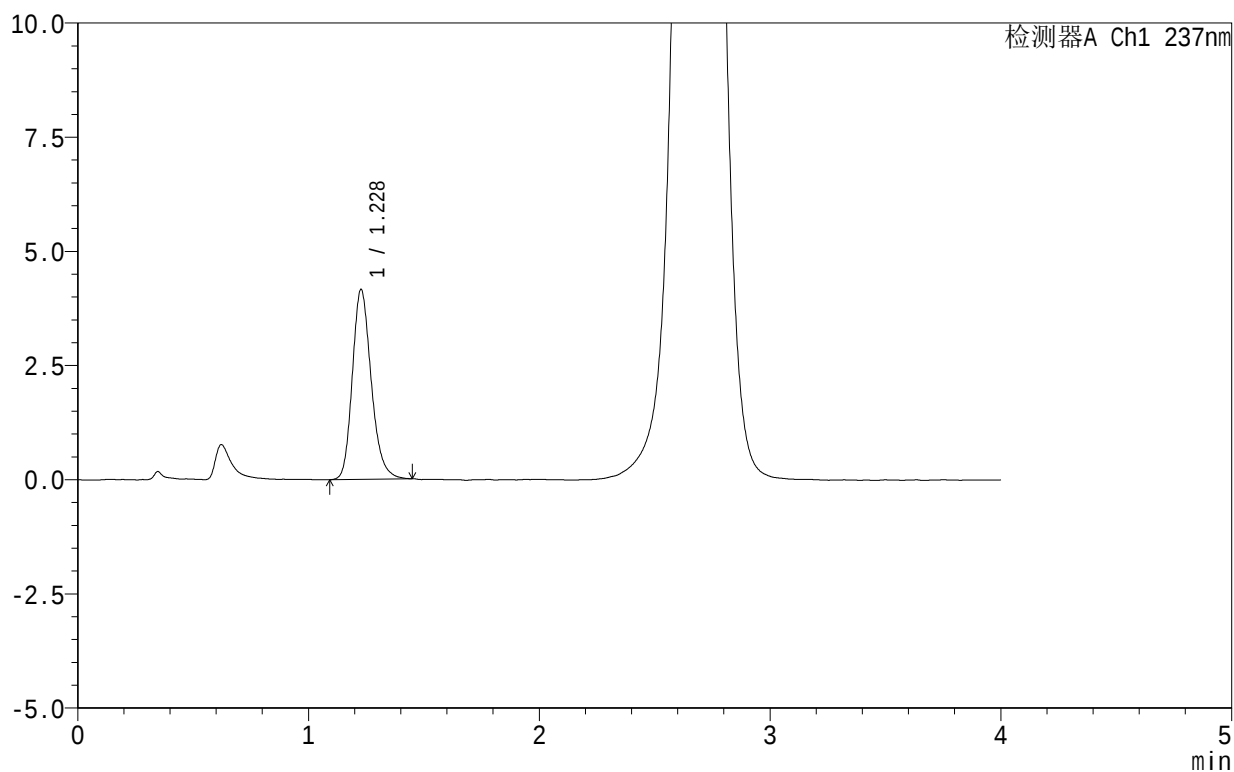

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23614	100.000	4149	1114	1.214	--
总计		23614	100.000	4149			


图73 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-305-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:11:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:42:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

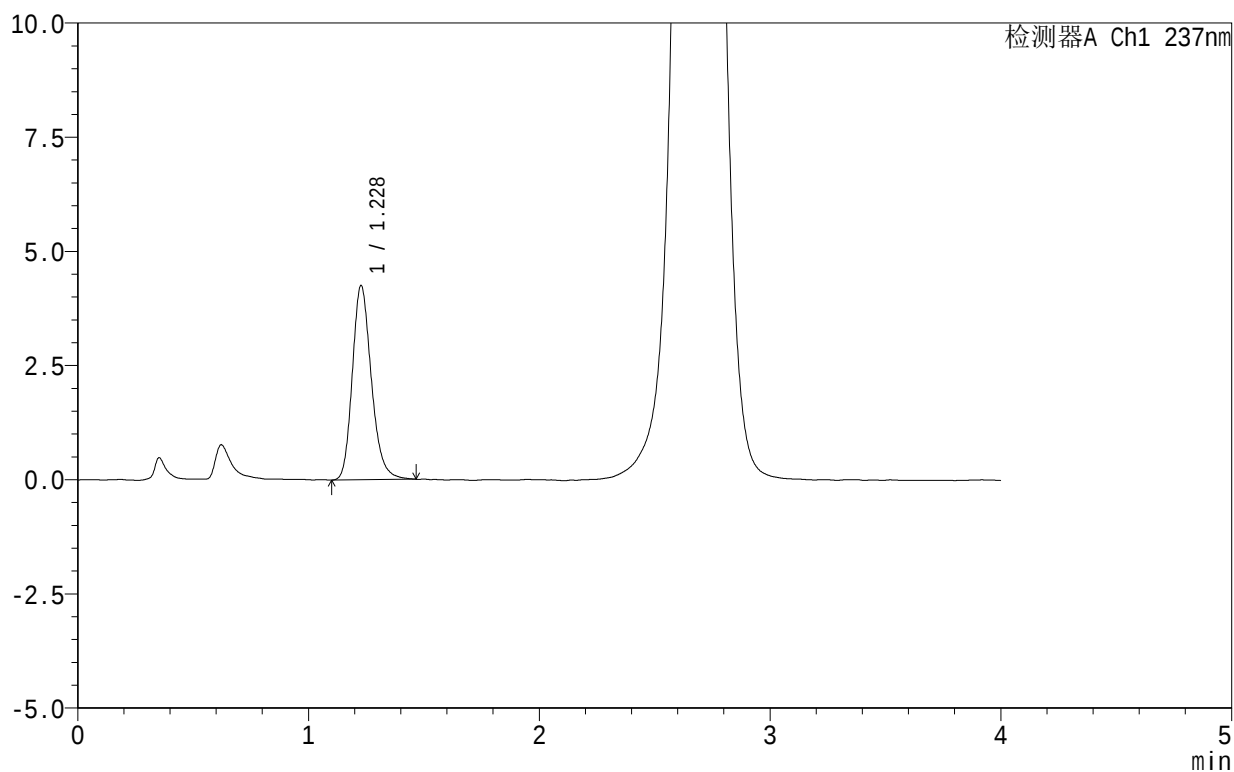

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	24356	100.000	4245	1097	1.218	--
总计		24356	100.000	4245			


图74 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-306-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:16:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:42:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

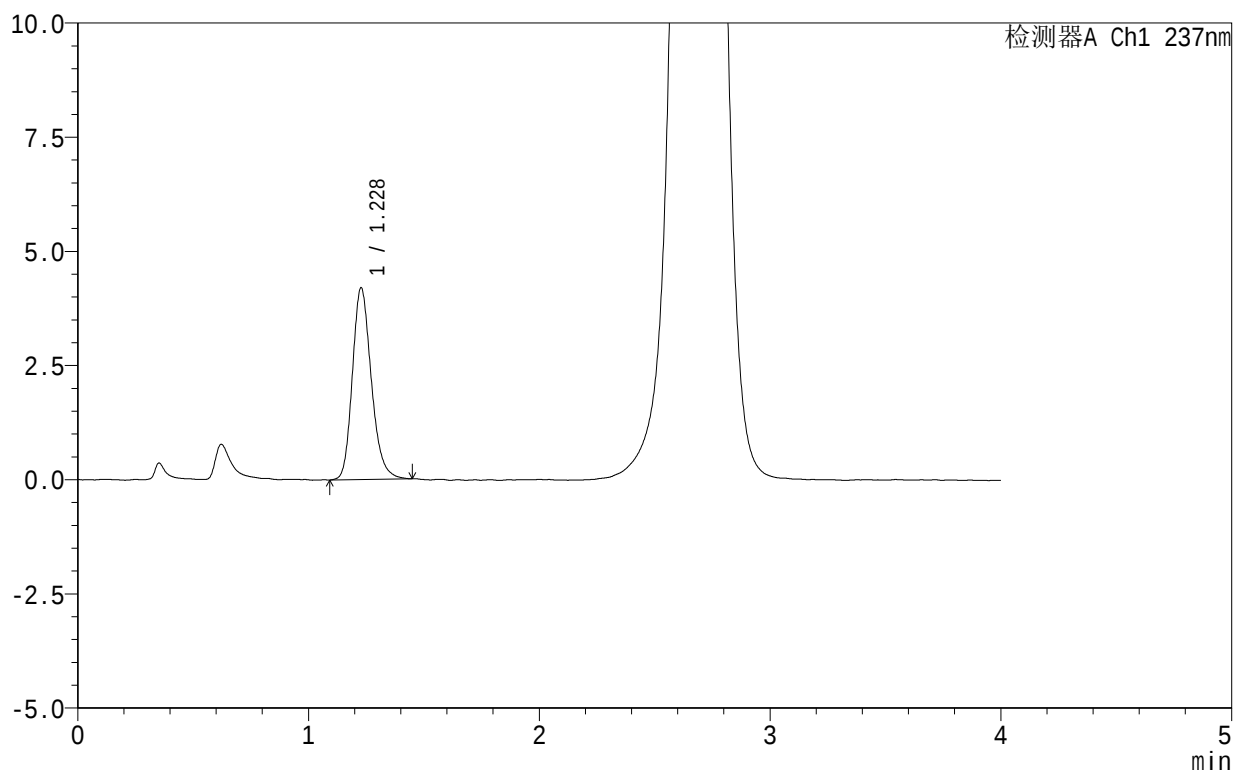

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23924	100.000	4192	1105	1.213	--
总计		23924	100.000	4192			


图75 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-307-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:20:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:42:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

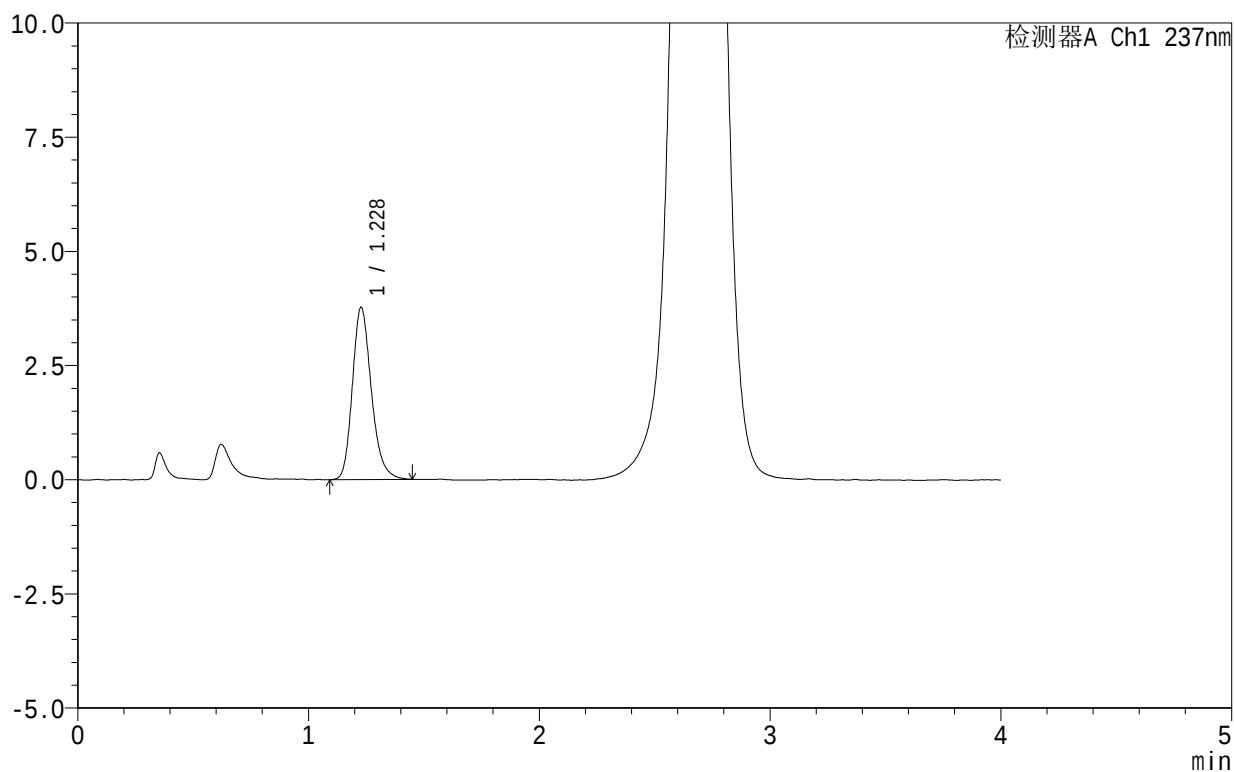

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	21571	100.000	3769	1106	1.224	--
总计		21571	100.000	3769			


图76 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-308-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:25:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:42:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

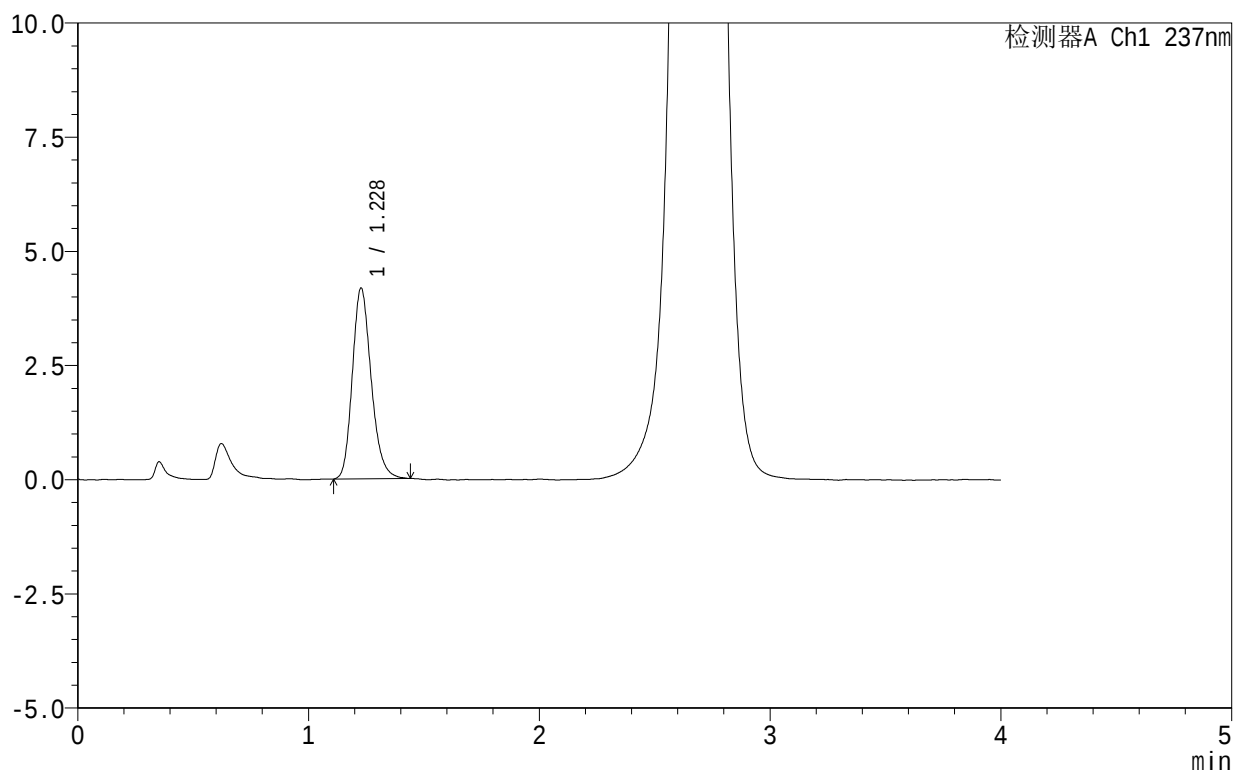

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23687	100.000	4172	1111	1.208	--
总计		23687	100.000	4172			


图77 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-309-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:29:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:42:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

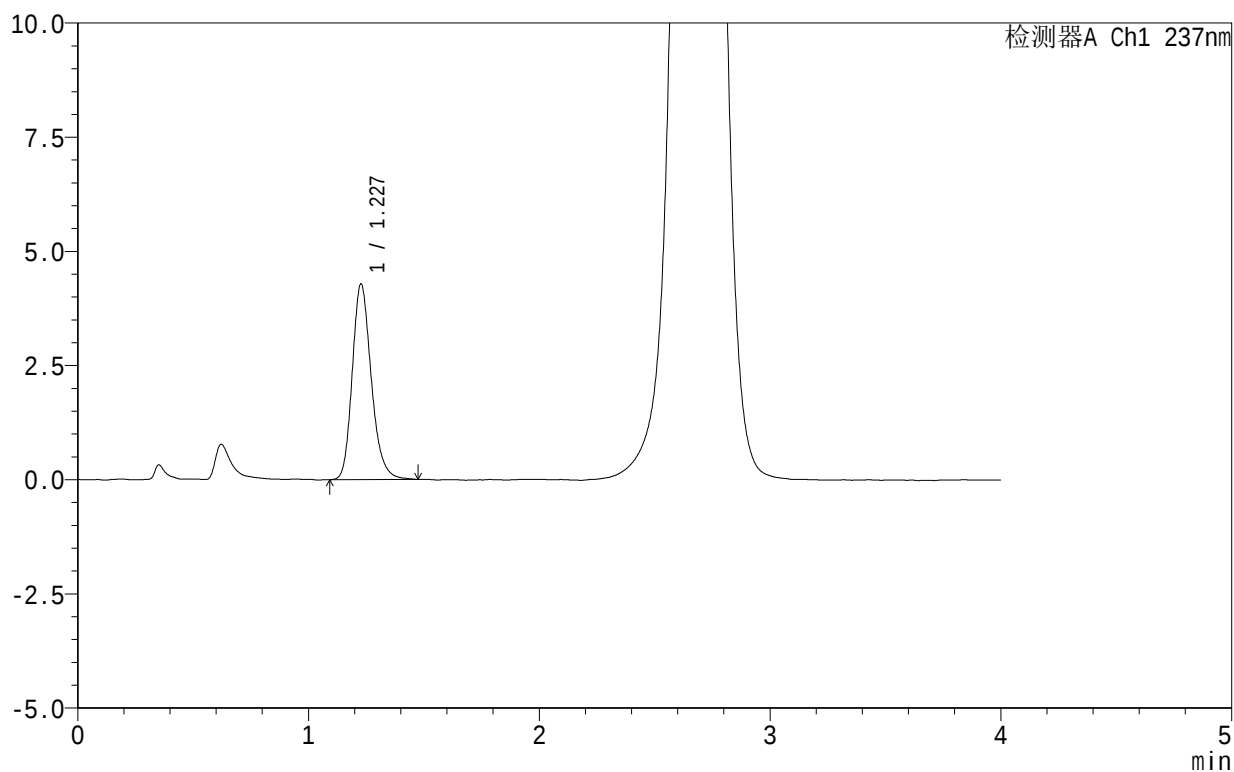

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	24529	100.000	4276	1105	1.218	--
总计		24529	100.000	4276			


图78 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-310-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:33:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:42:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

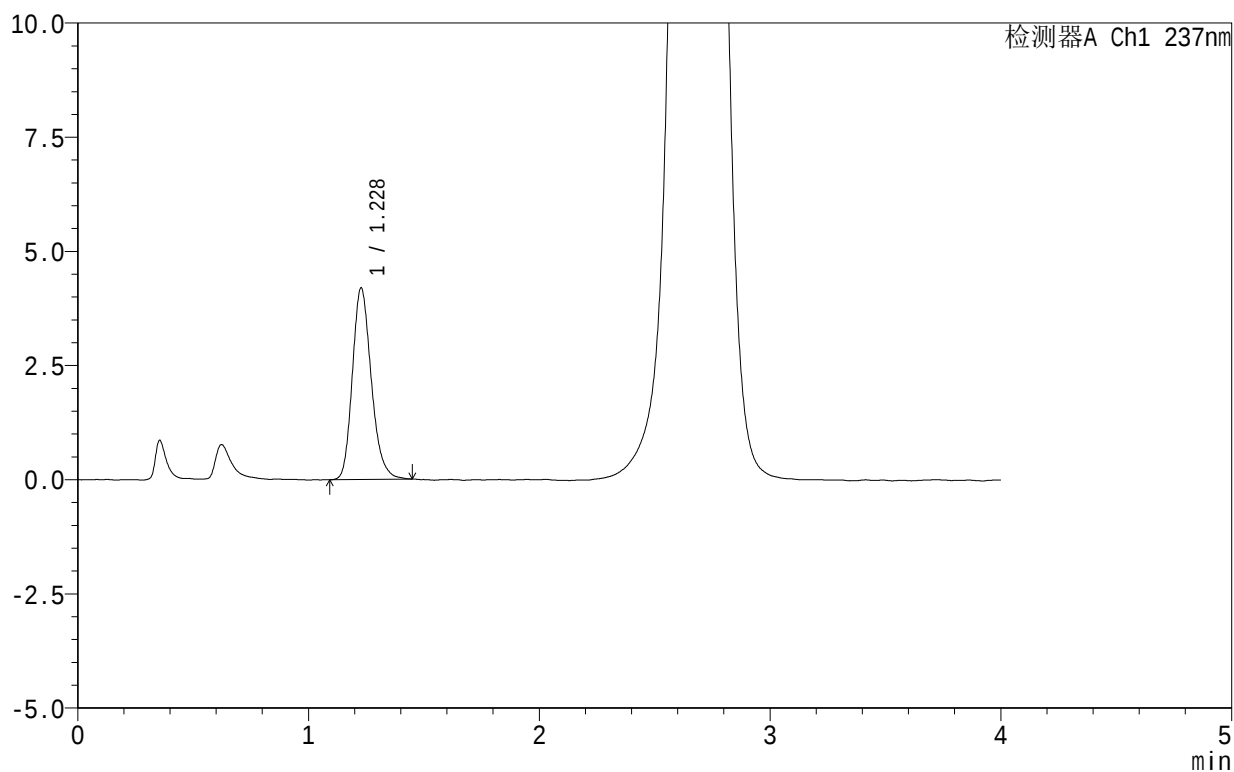

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23877	100.000	4188	1101	1.213	--
总计		23877	100.000	4188			

图79 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-15min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-311-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:38:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:42:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

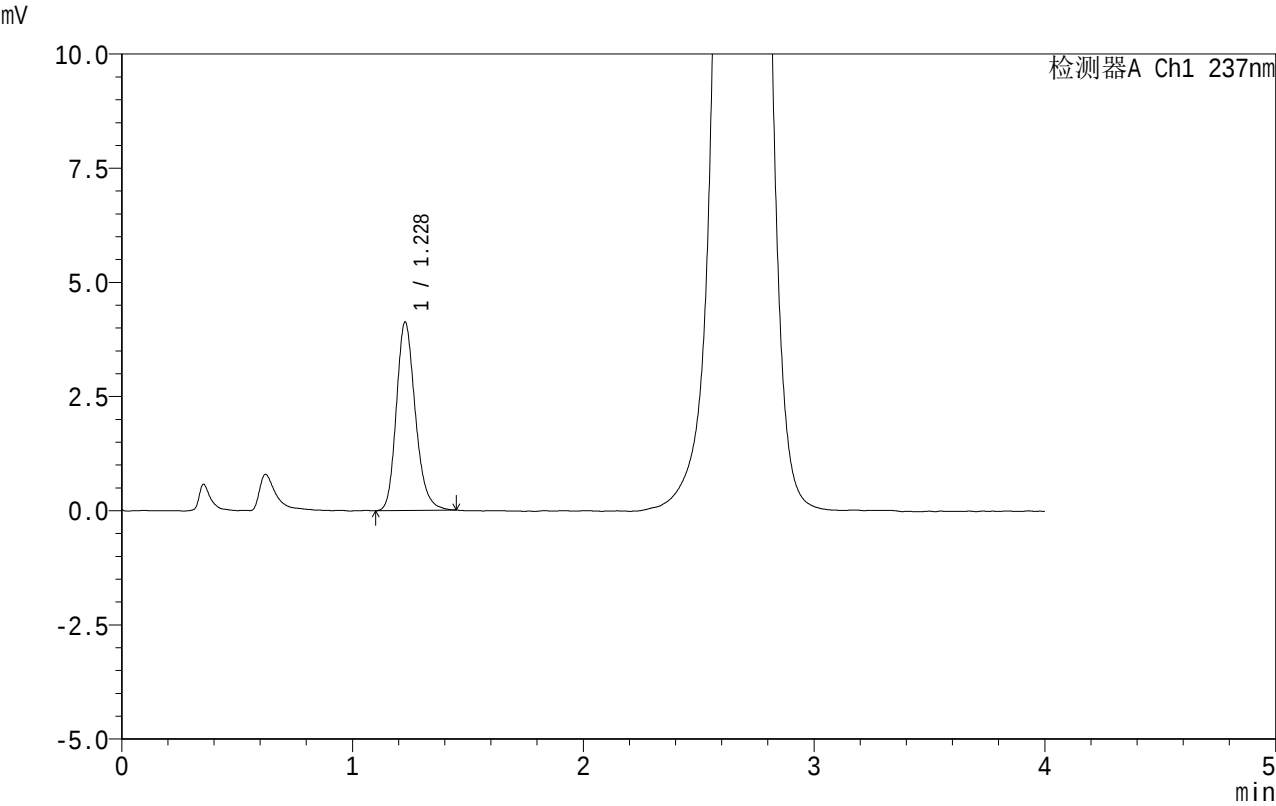

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23522	100.000	4120	1105	1.212	--
总计		23522	100.000	4120			


图80 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-312-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:42:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:42:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

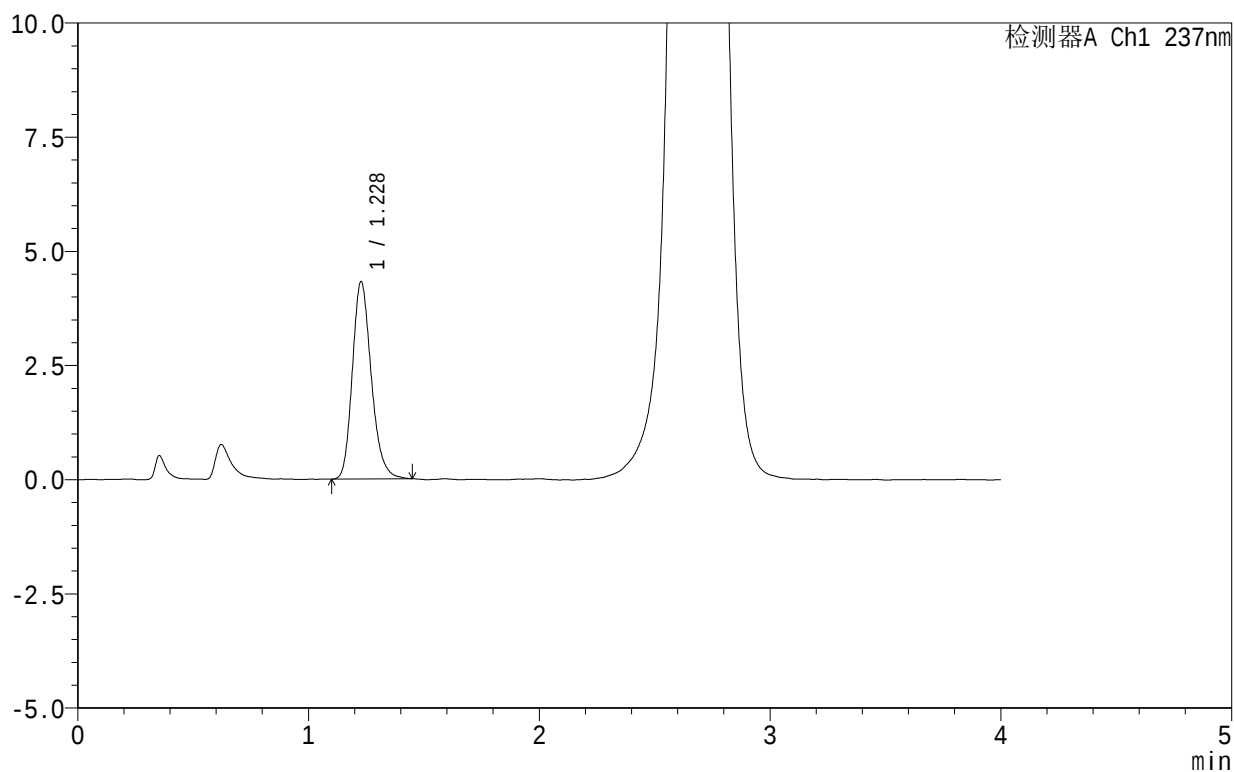

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	24568	100.000	4313	1108	1.215	--
总计		24568	100.000	4313			


图81 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-313-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:47:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:42:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

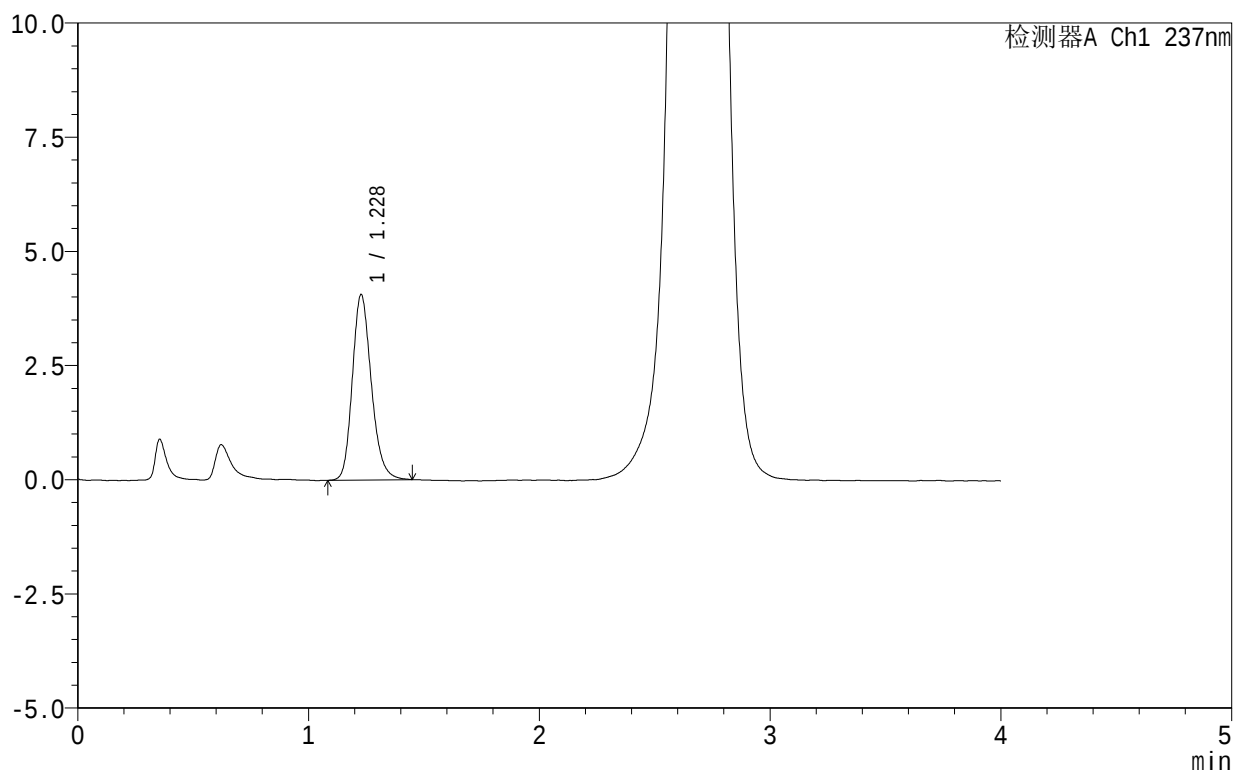

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23206	100.000	4055	1095	1.204	--
总计		23206	100.000	4055			


图82 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-314-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:51:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:43:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

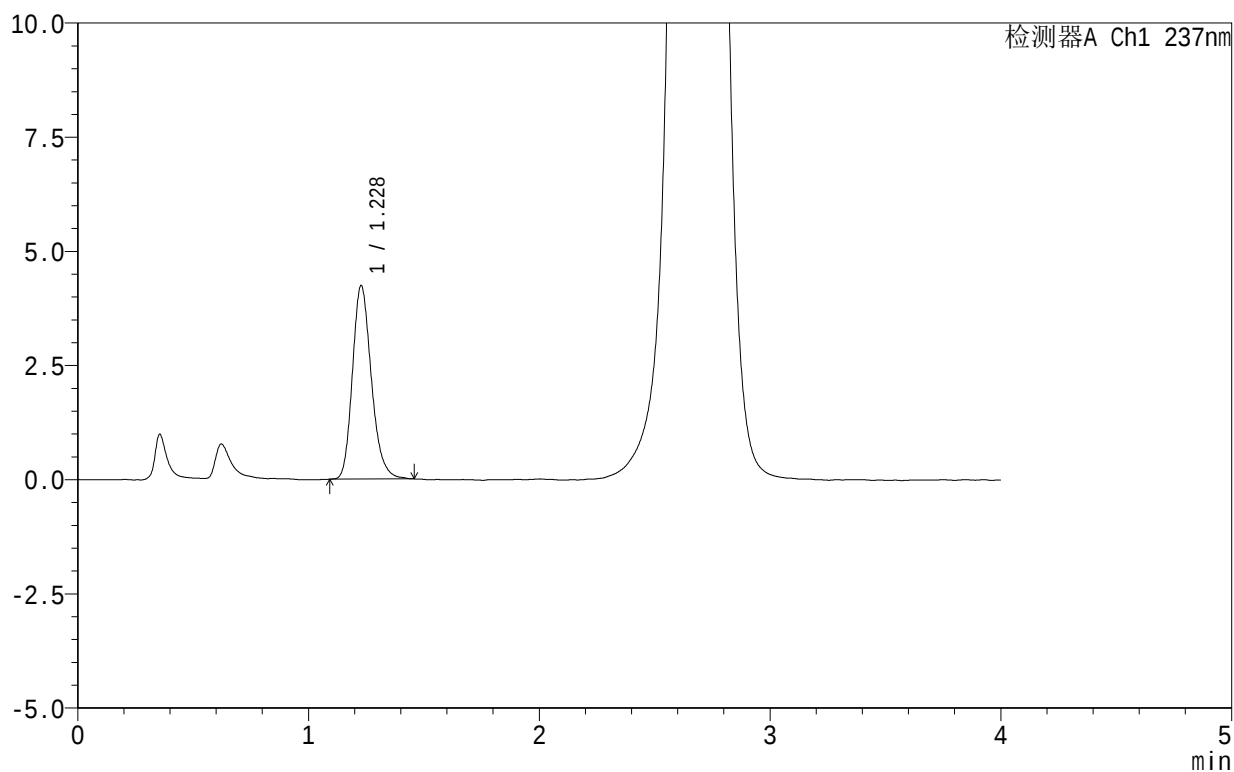

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	24140	100.000	4232	1109	1.218	--
总计		24140	100.000	4232			


图83 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-315-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:55:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:43:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

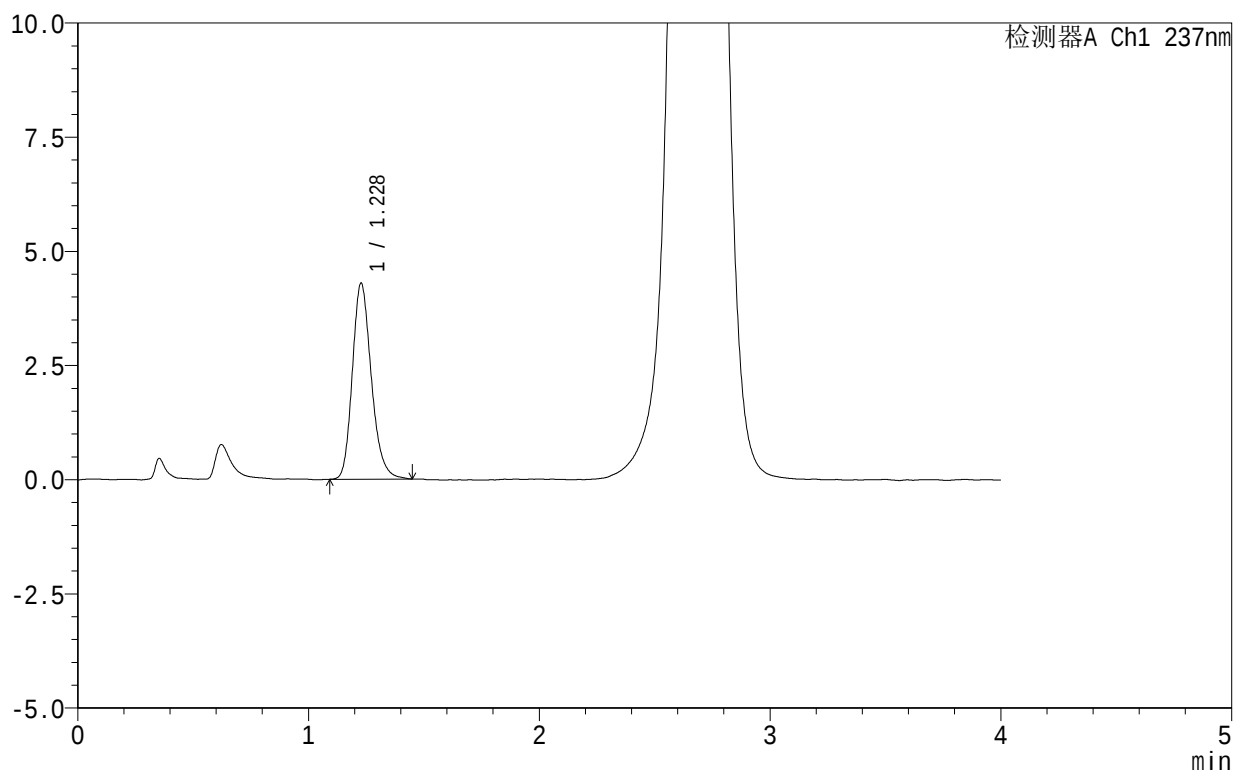

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	24482	100.000	4285	1102	1.215	--
总计		24482	100.000	4285			


图84 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-316-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:00:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:43:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

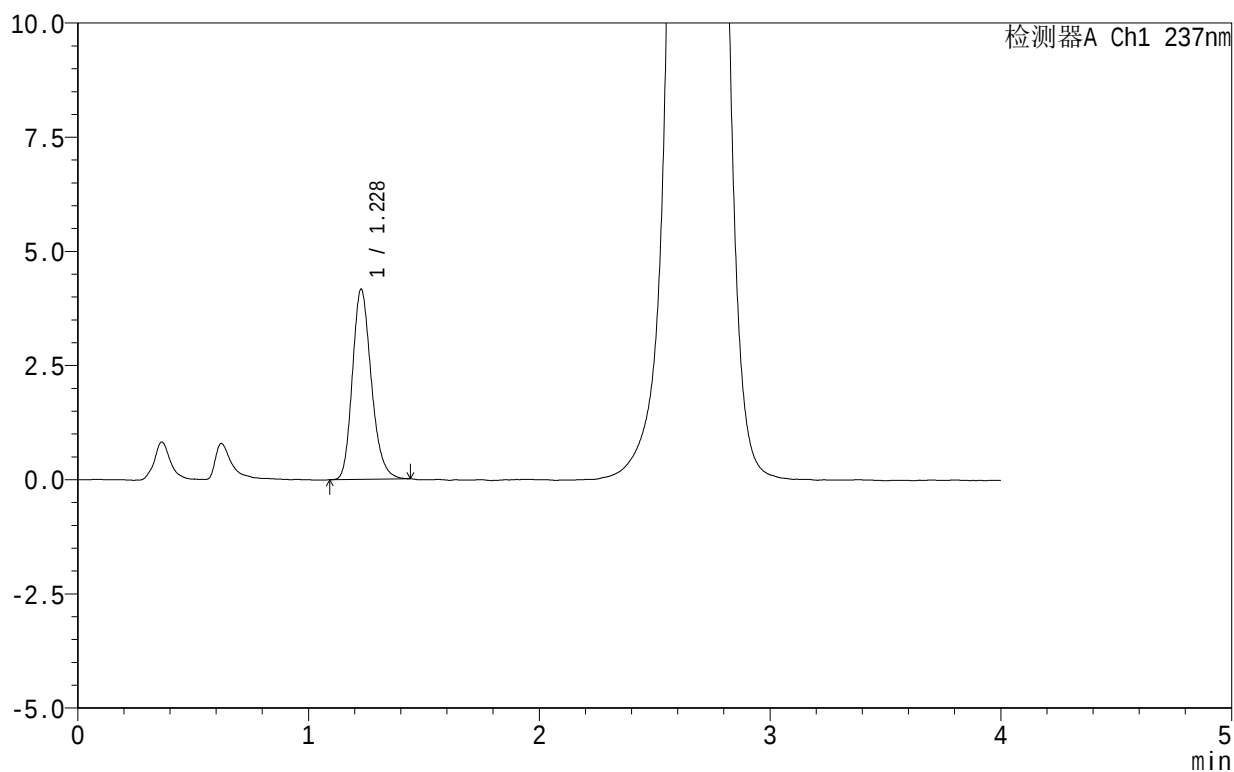

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23688	100.000	4159	1101	1.213	--
总计		23688	100.000	4159			


图85 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-317-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:04:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:43:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

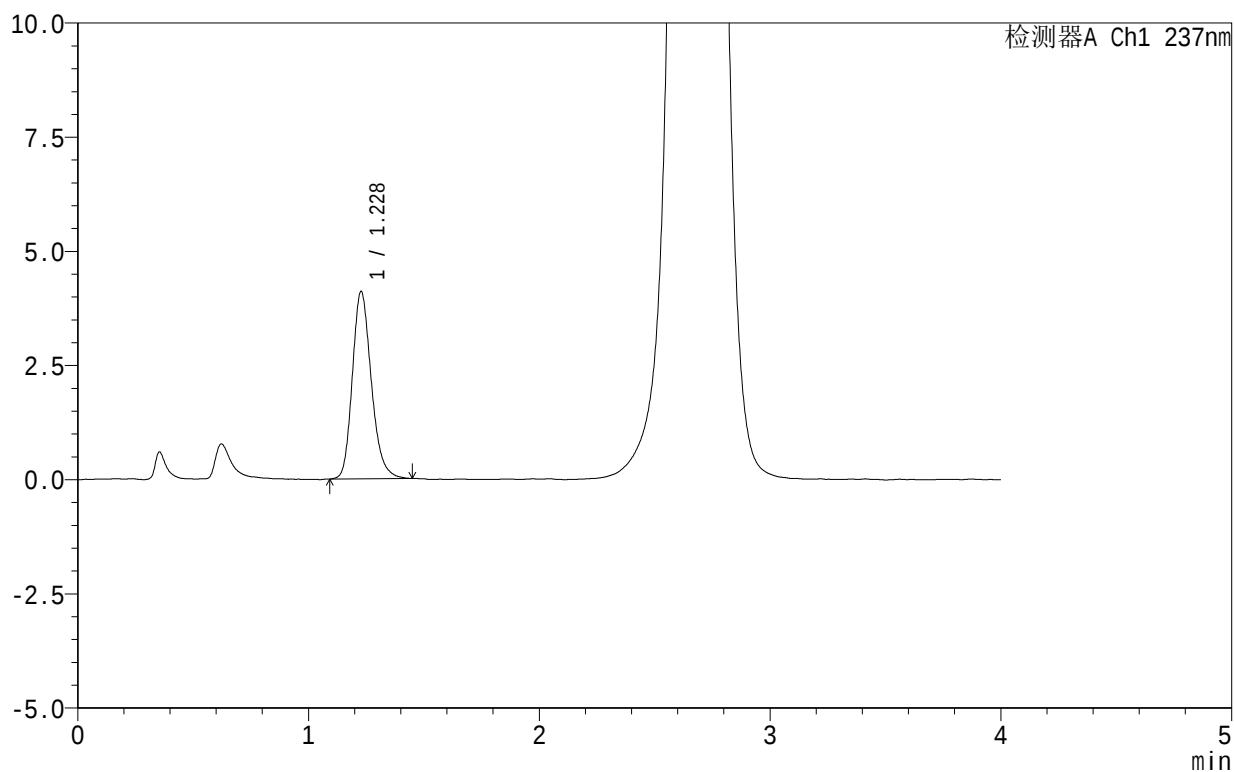

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23437	100.000	4098	1101	1.217	--
总计		23437	100.000	4098			


图86 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-318-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:09:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:43:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

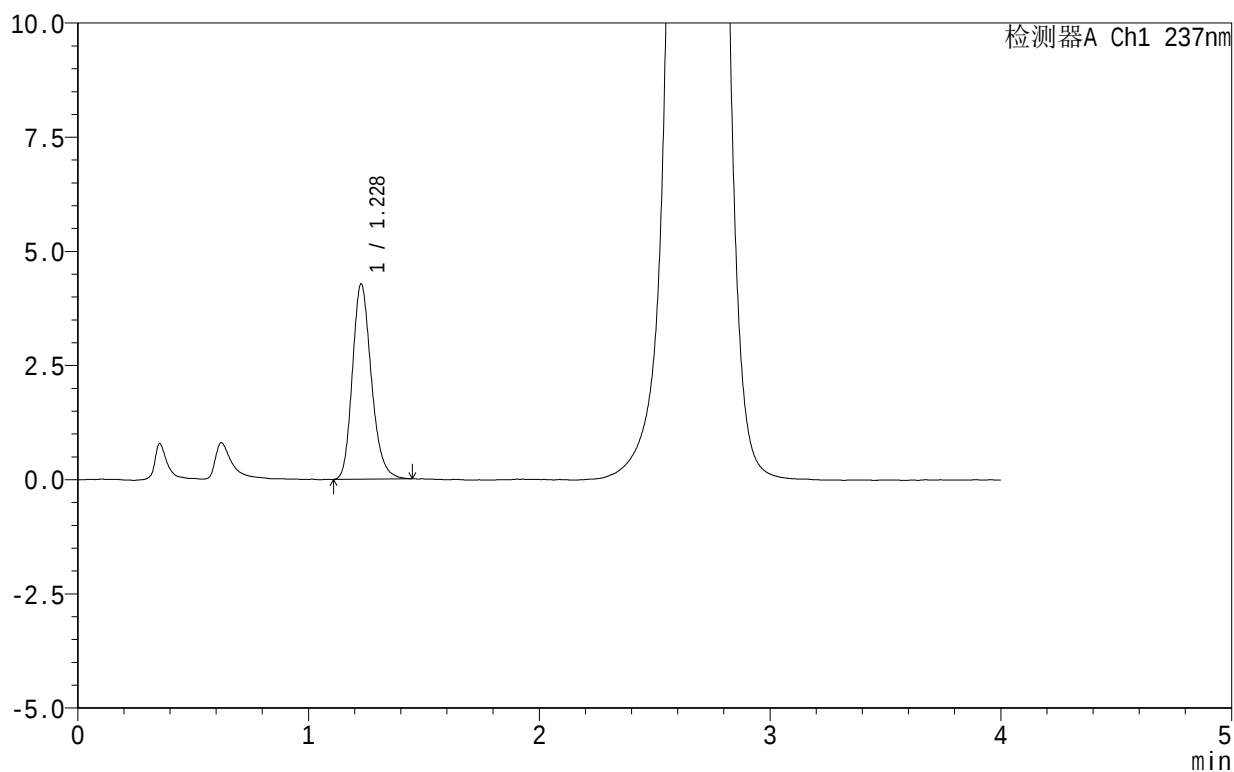

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	24353	100.000	4269	1104	1.214	--
总计		24353	100.000	4269			

图87 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-30min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-319-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:13:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:43:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

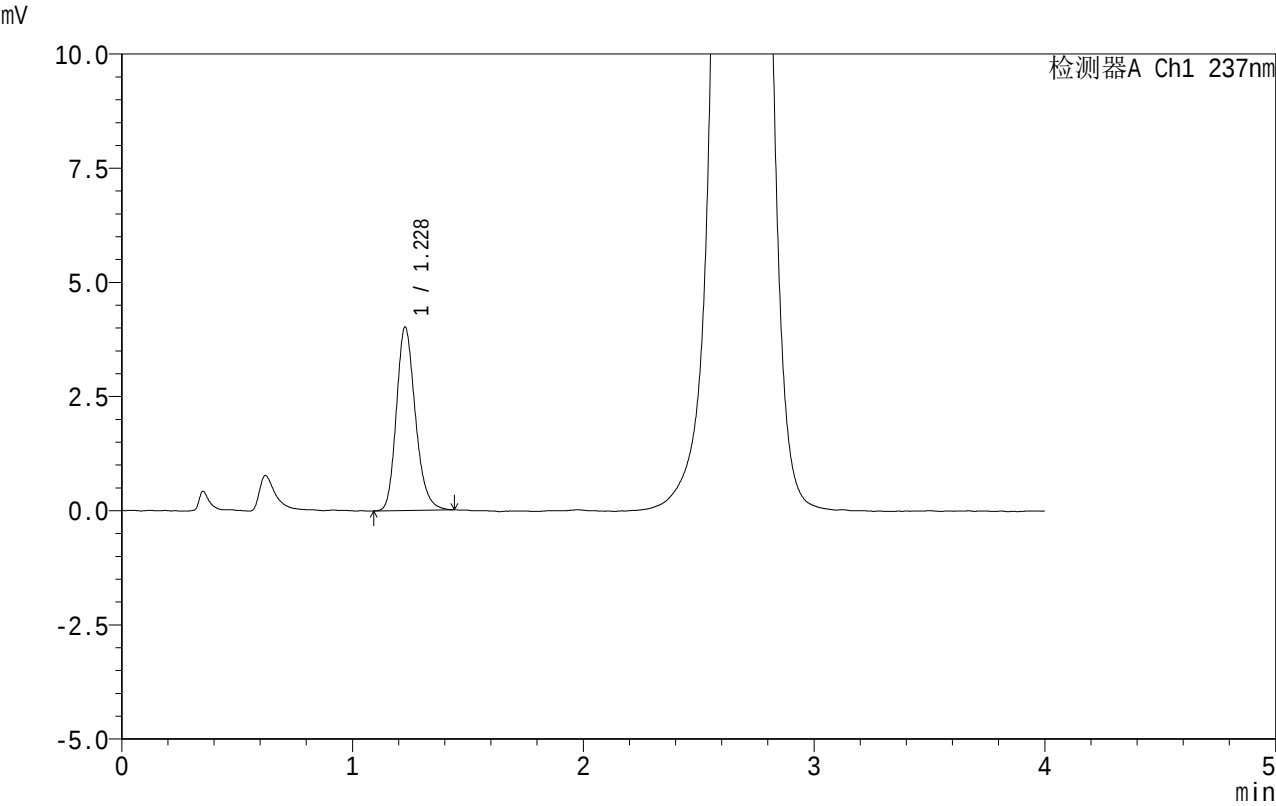

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	22891	100.000	4010	1098	1.211	--
总计		22891	100.000	4010			


图88 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-320-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:17:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:43:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

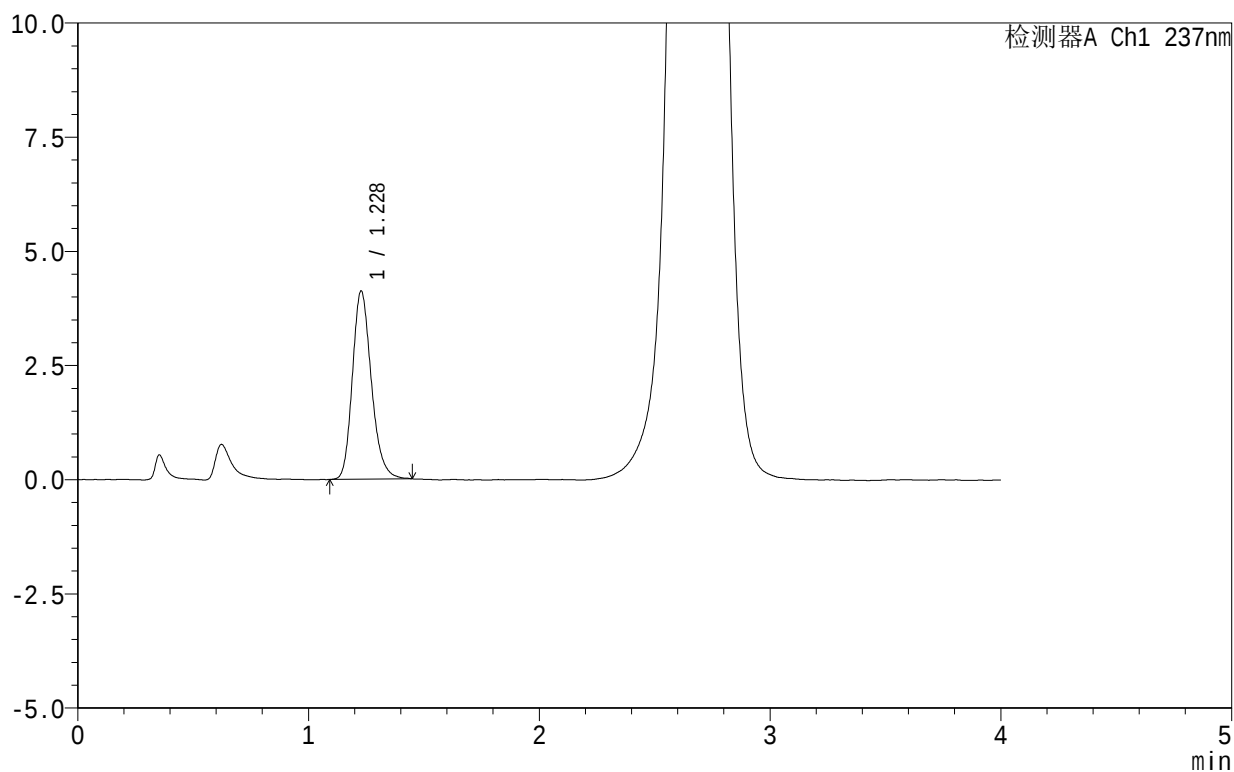

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23509	100.000	4116	1105	1.214	--
总计		23509	100.000	4116			


图89 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-321-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:22:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:43:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

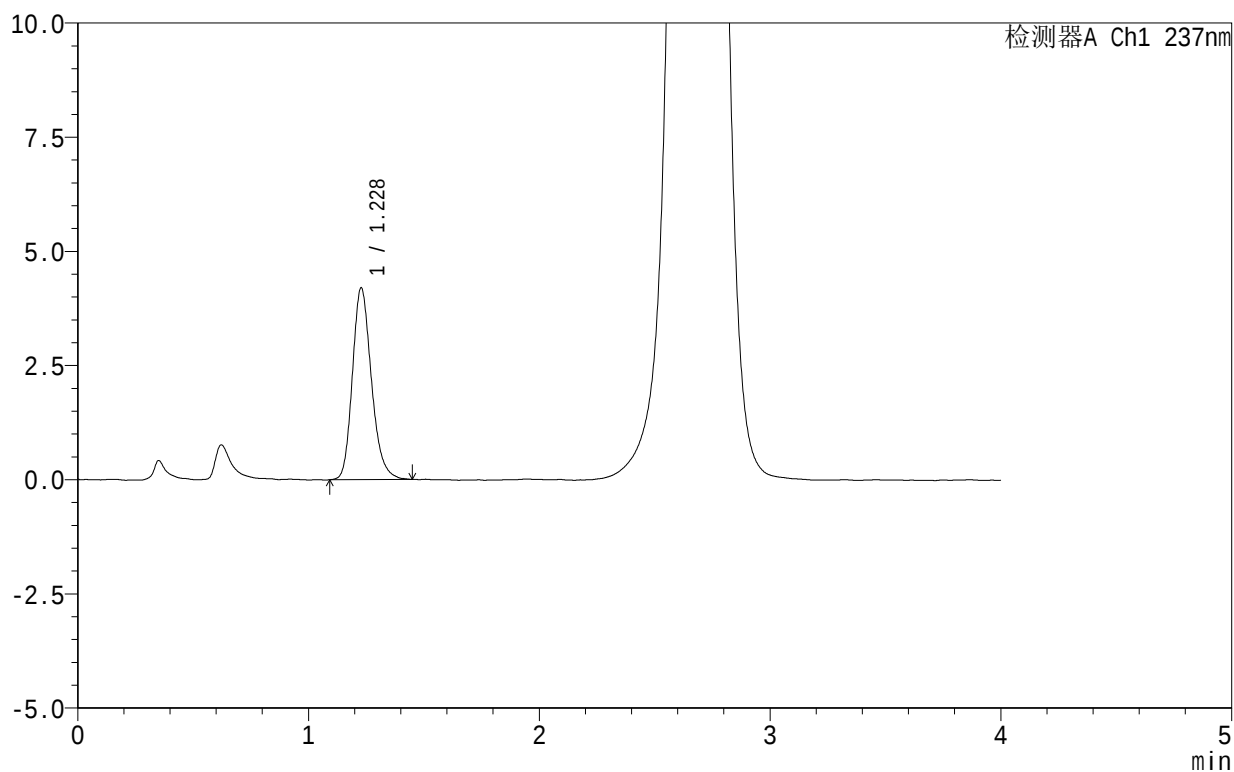

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	24051	100.000	4196	1096	1.215	--
总计		24051	100.000	4196			


图90 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-322-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:26:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:43:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

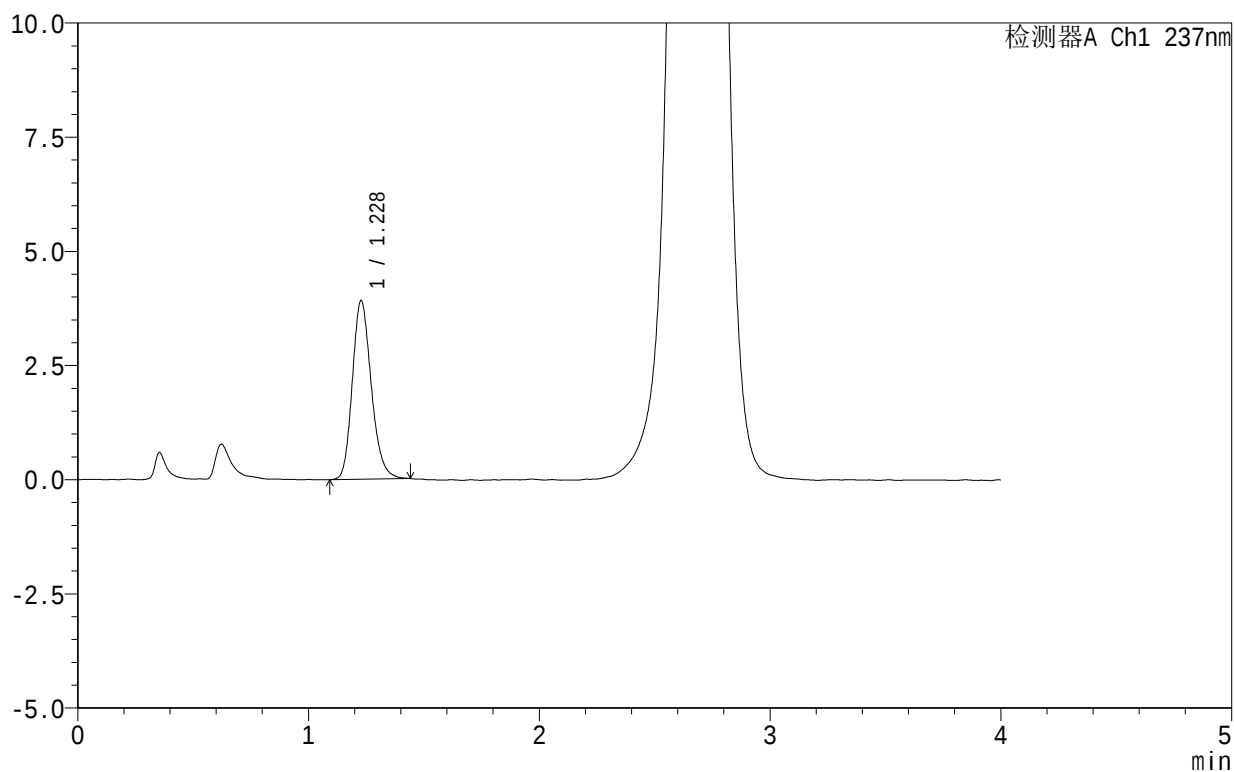

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	22334	100.000	3906	1096	1.199	--
总计		22334	100.000	3906			


图91 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-323-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:31:07 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:43:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

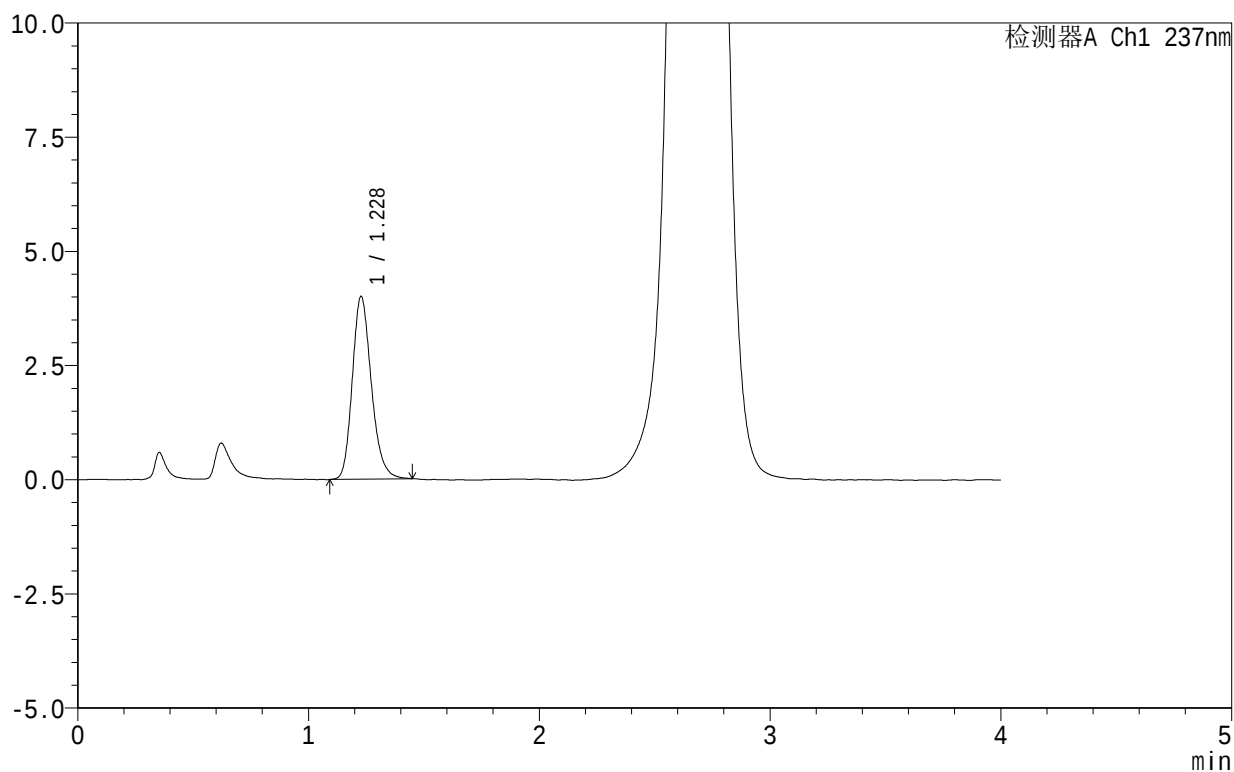

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	22918	100.000	3997	1095	1.211	--
总计		22918	100.000	3997			


图92 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-324-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:35:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:43:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

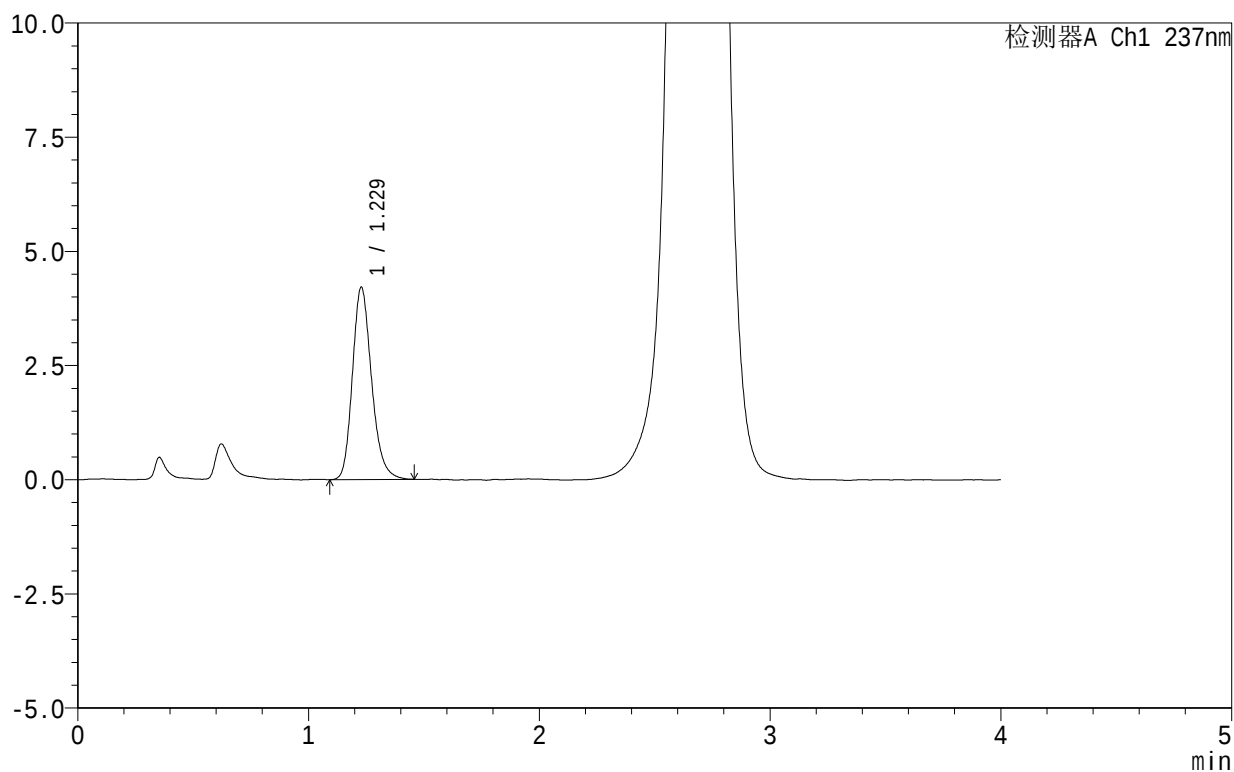

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	24274	100.000	4213	1088	1.213	--
总计		24274	100.000	4213			

图93 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-45min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-325-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:39:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:43:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

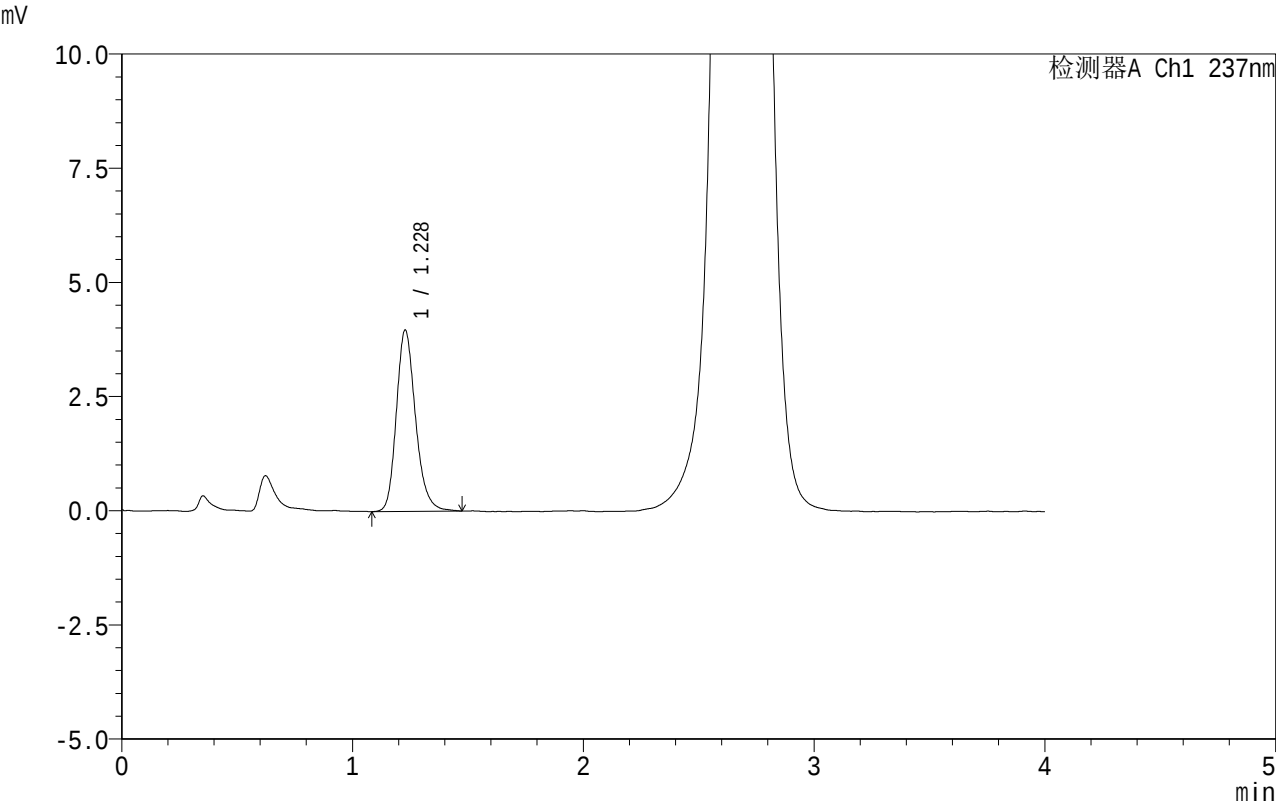

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	22930	100.000	3969	1089	1.213	--
总计		22930	100.000	3969			


图94 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-326-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:44:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:43:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

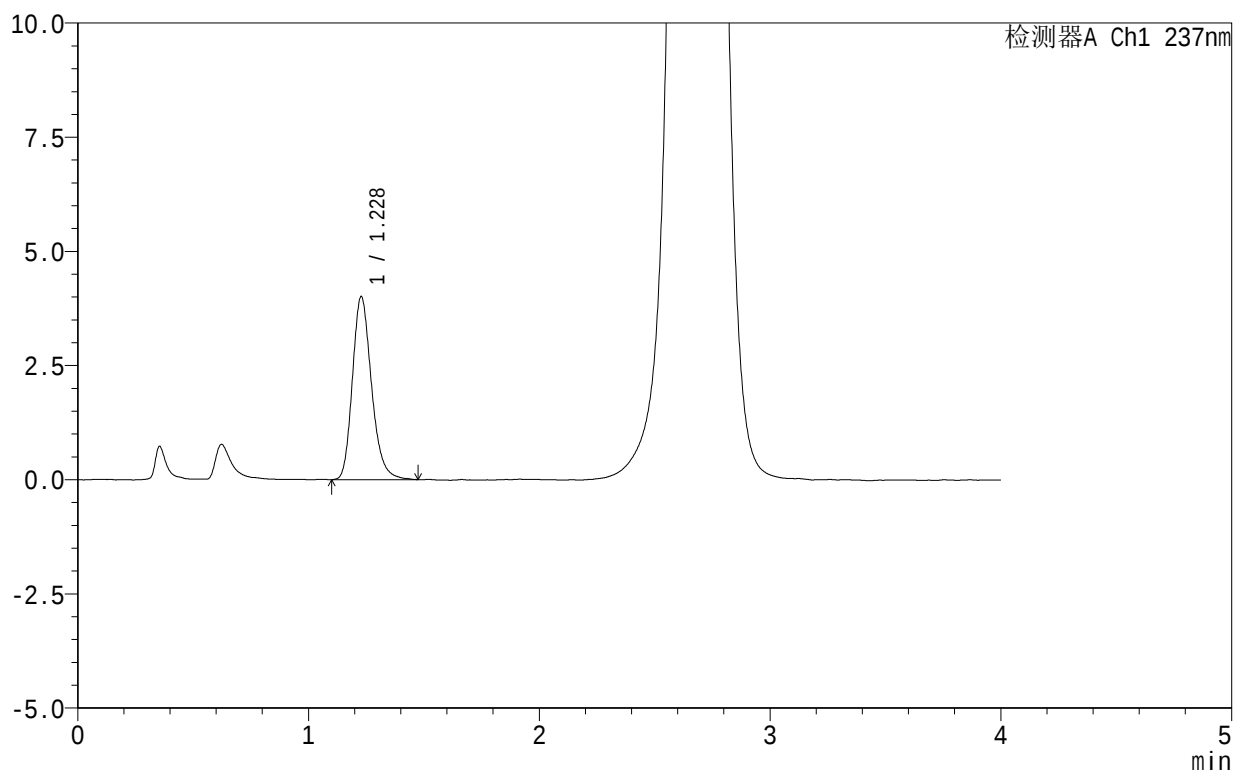

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	23087	100.000	4010	1088	1.225	--
总计		23087	100.000	4010			


图95 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-327-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:48:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:43:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

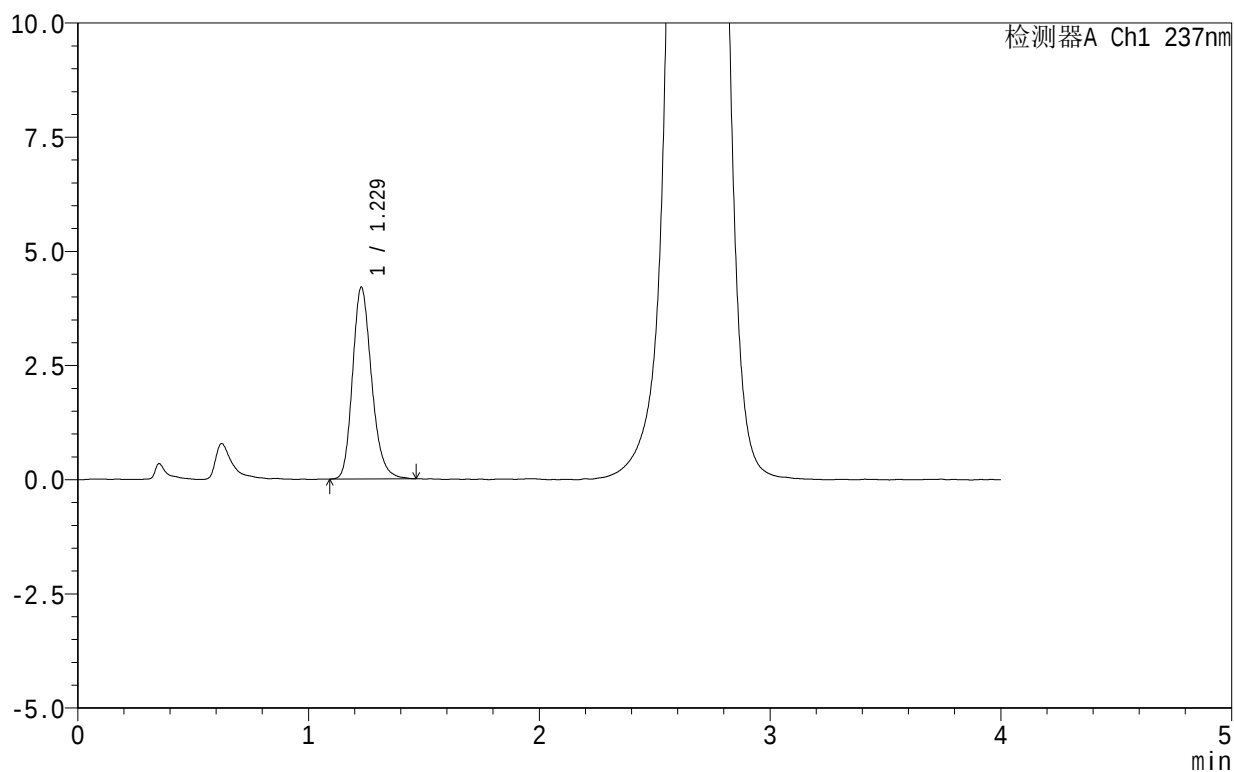

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	24108	100.000	4200	1094	1.214	--
总计		24108	100.000	4200			


图96 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-328-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:53:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:43:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

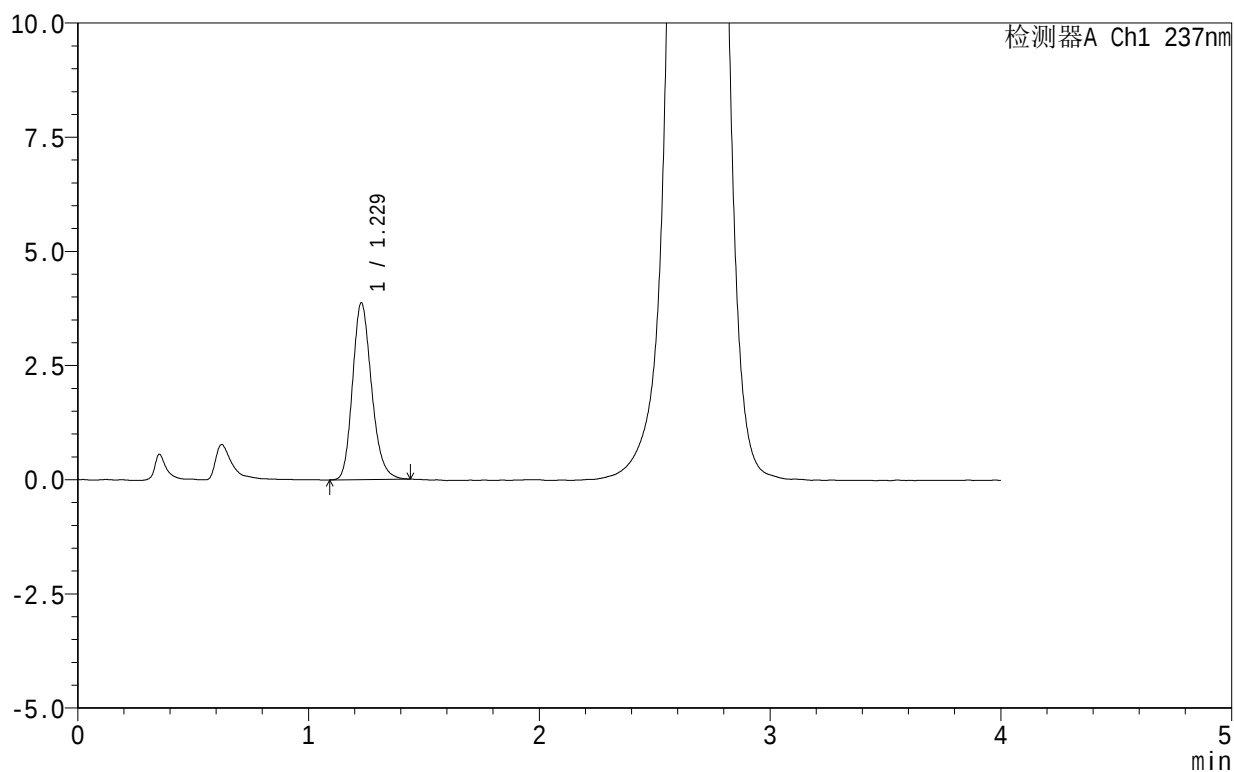

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	22141	100.000	3870	1083	1.201	--
总计		22141	100.000	3870			


图97 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-329-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:57:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:43:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

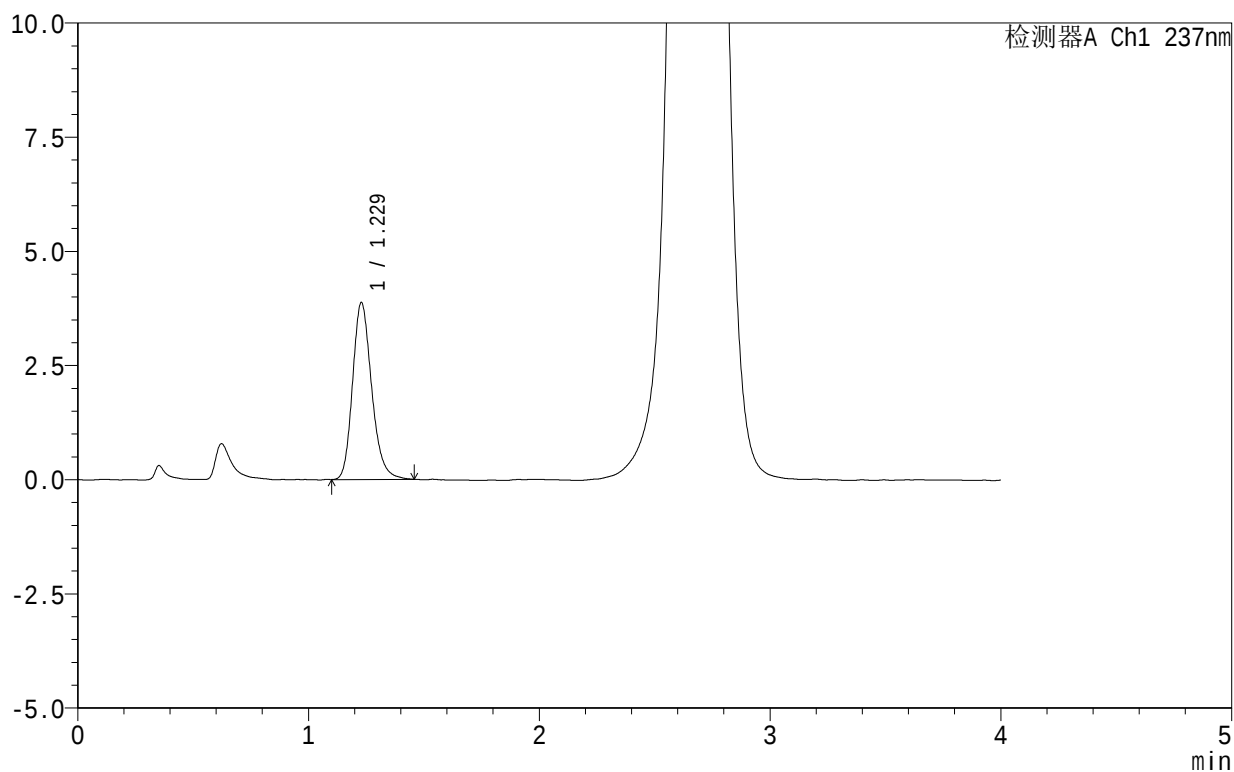

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	22253	100.000	3874	1092	1.213	--
总计		22253	100.000	3874			


图98 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-330-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 23:01:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:43:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

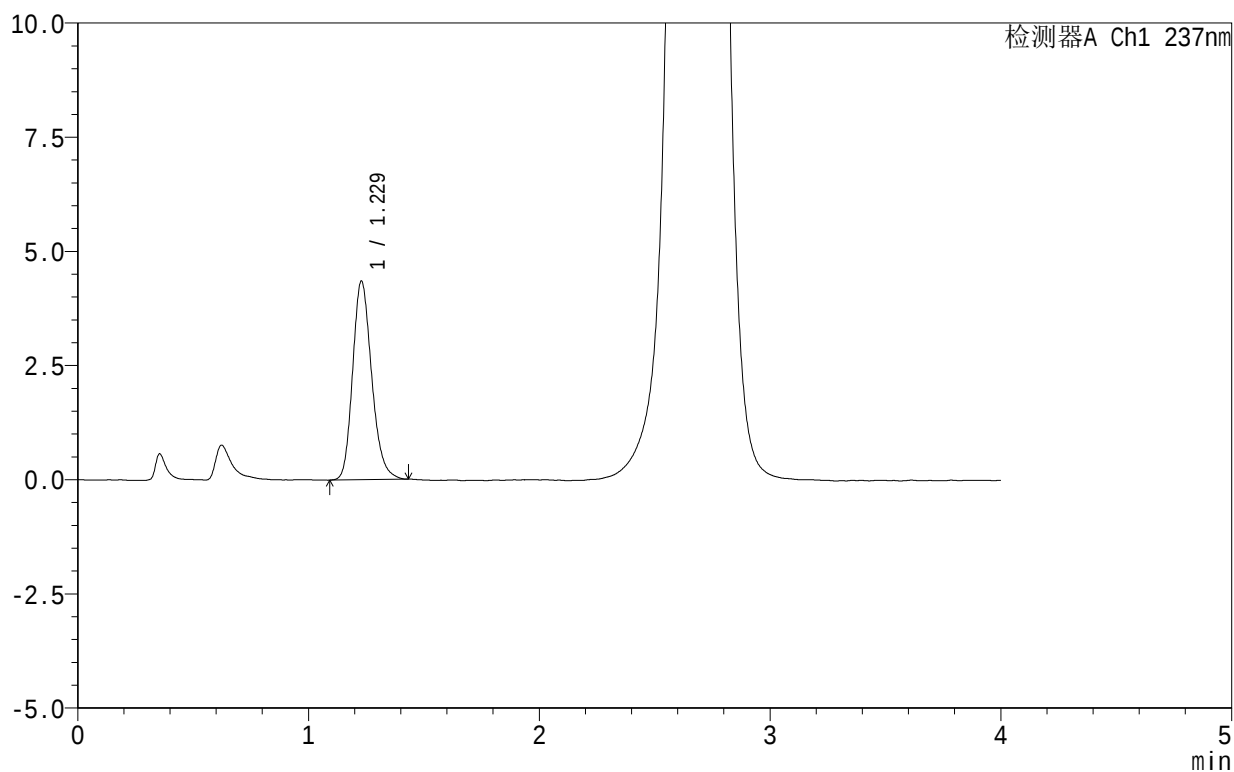

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	24931	100.000	4351	1088	1.209	--
总计		24931	100.000	4351			

图99 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-60min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-331-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:06:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:43:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

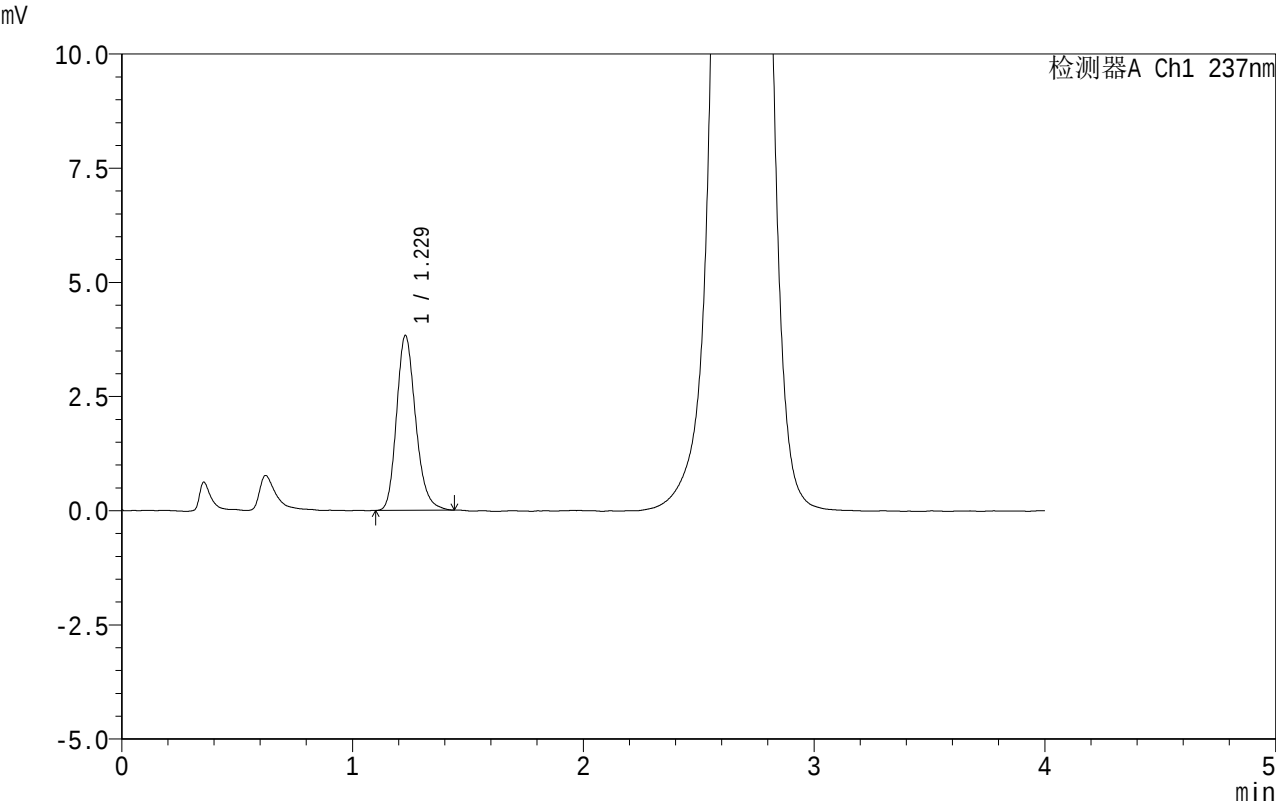

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	22018	100.000	3830	1087	1.212	--
总计		22018	100.000	3830			


图100 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-332-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 23:10:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:43:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

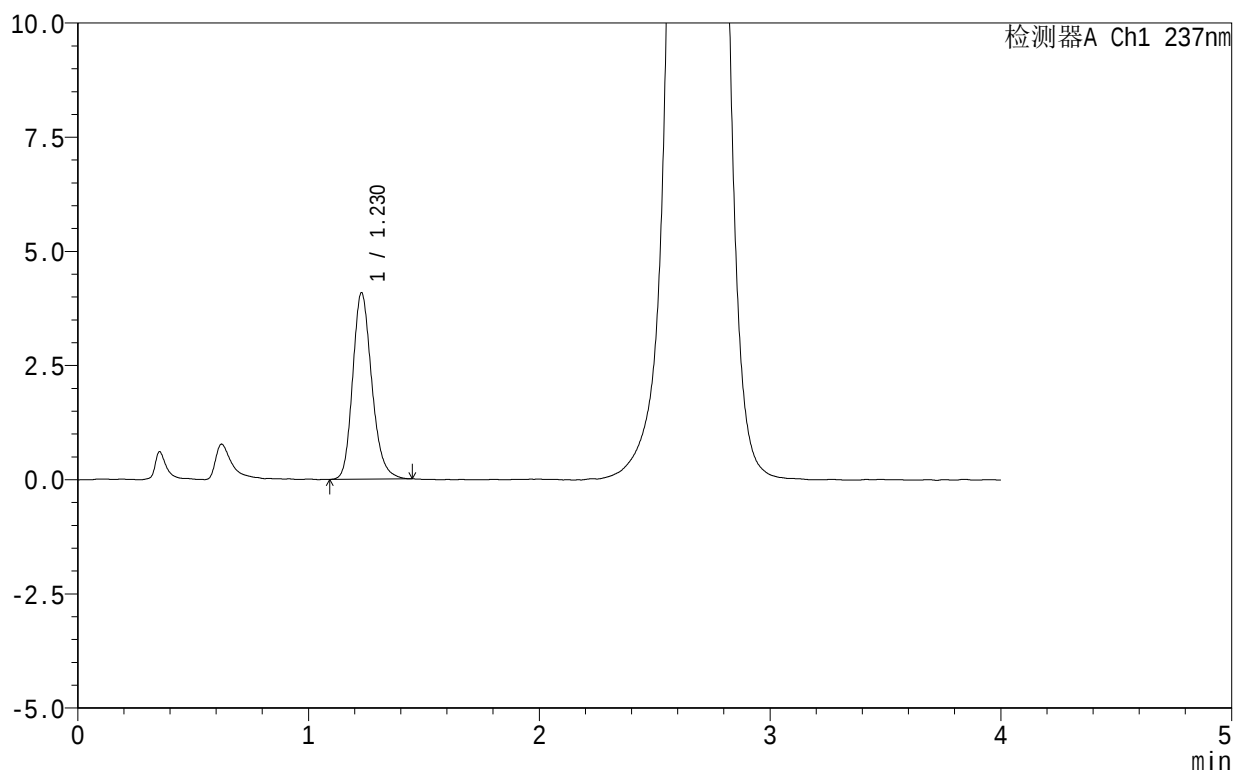

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	23504	100.000	4085	1086	1.207	--
总计		23504	100.000	4085			

图101 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-60min-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-333-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:15:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:43:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

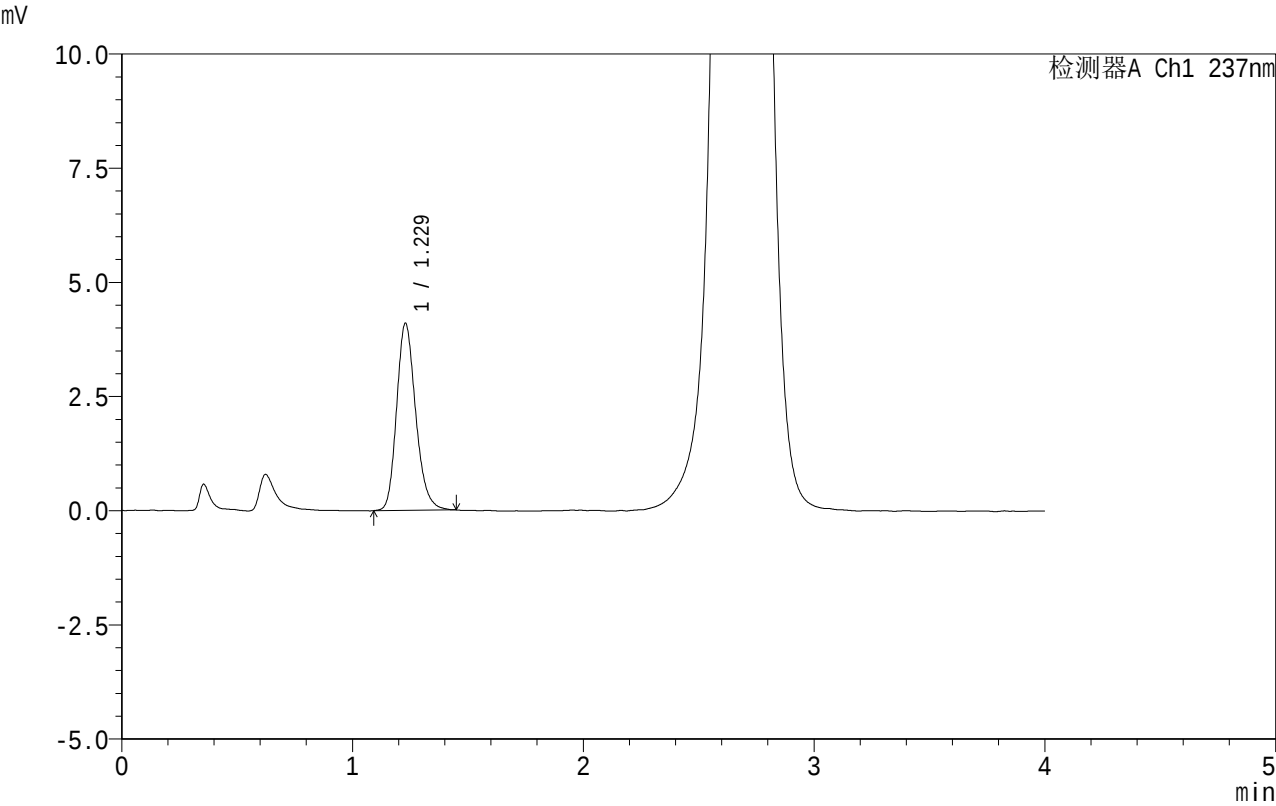

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	23511	100.000	4098	1094	1.209	--
总计		23511	100.000	4098			

图102 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-60min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-334-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:19:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:43:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

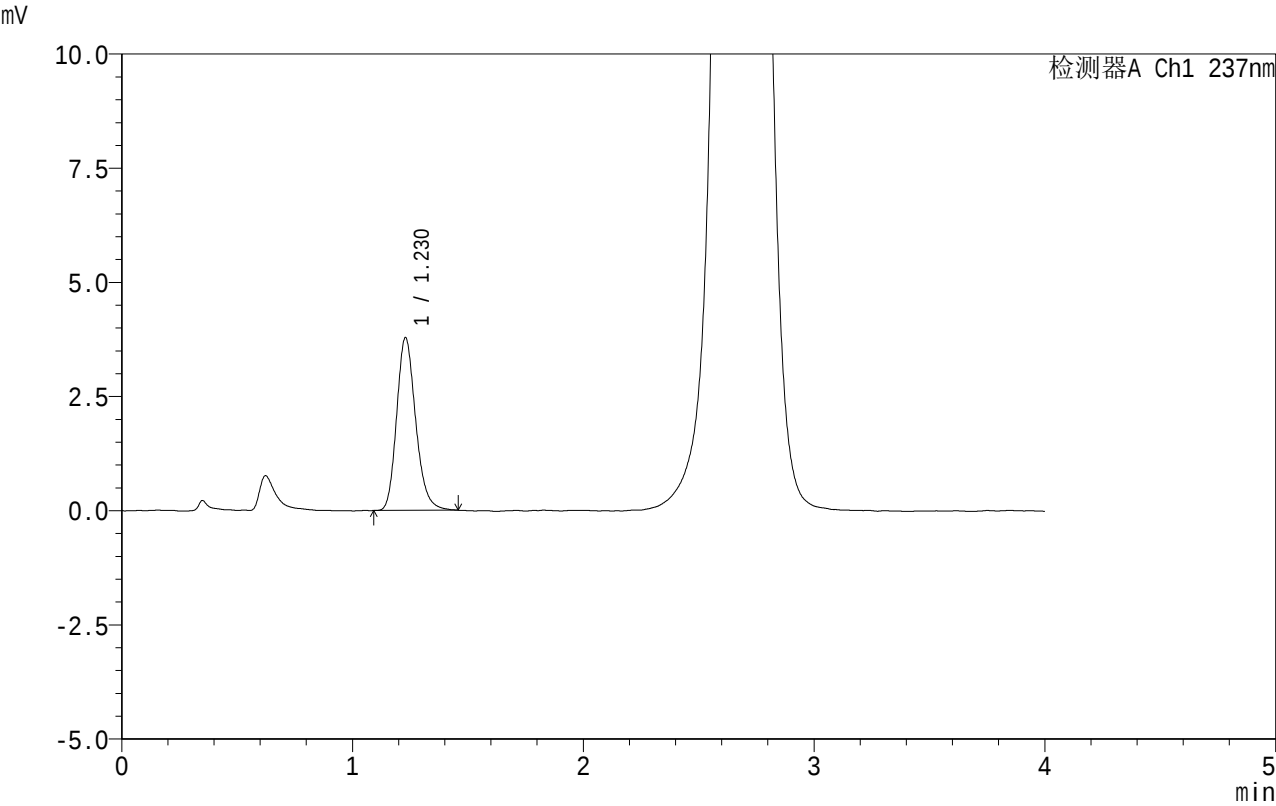

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	21674	100.000	3784	1096	1.203	--
总计		21674	100.000	3784			

图103 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-60min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-335-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:24:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:43:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

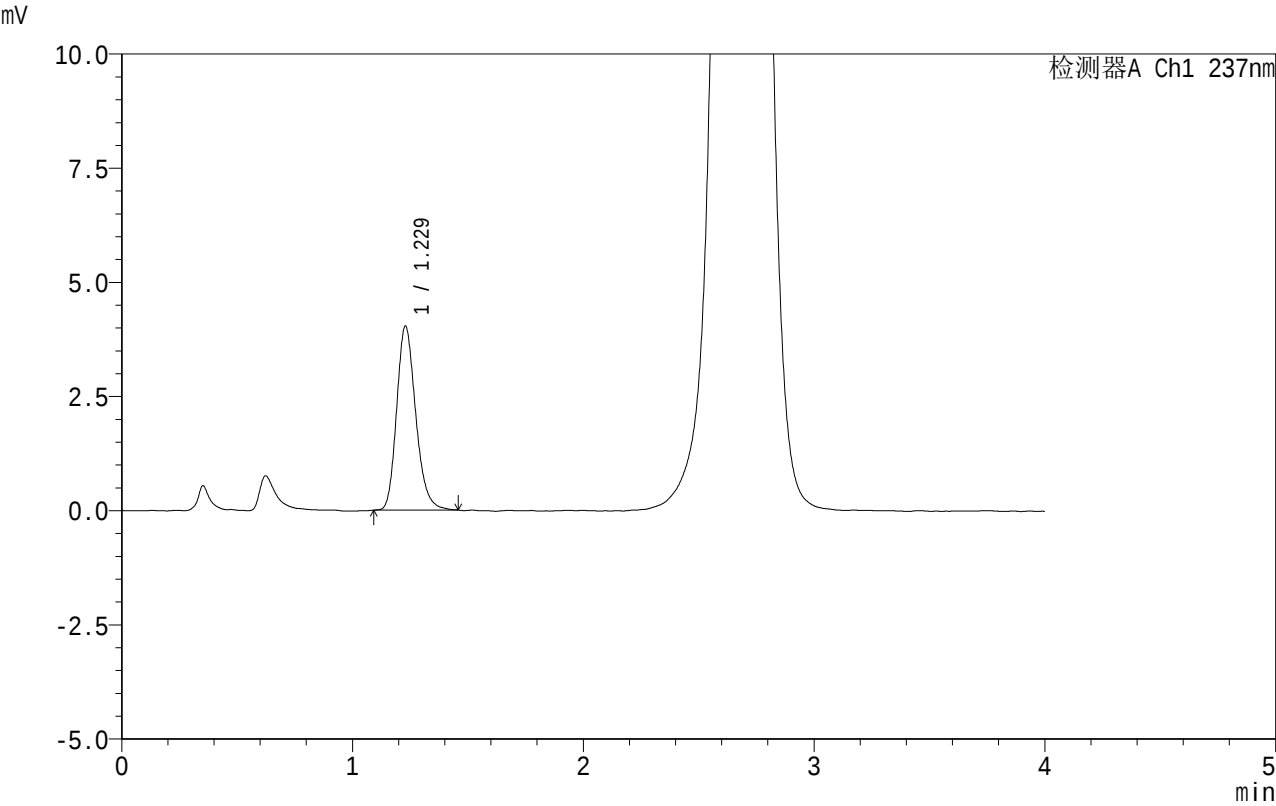

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	23123	100.000	4030	1090	1.214	--
总计		23123	100.000	4030			


图104 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-浆法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-336-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 23:28:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:44:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

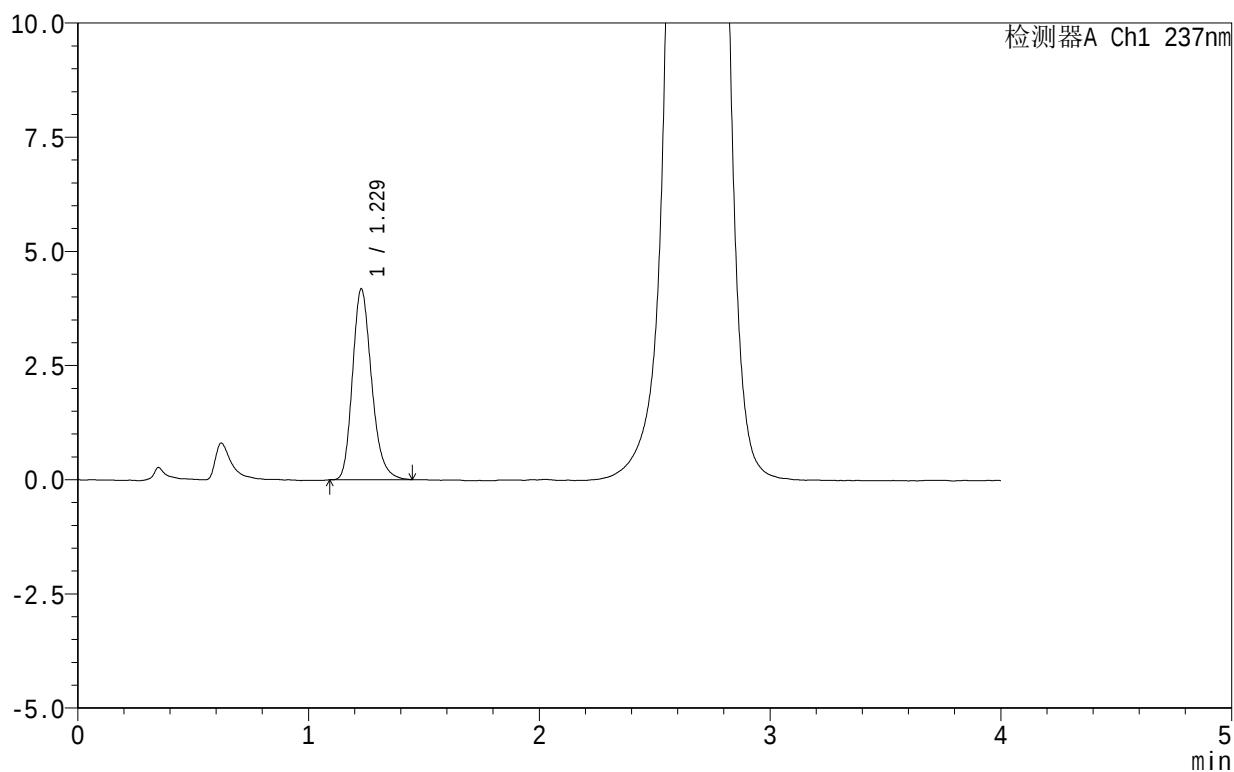

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	24021	100.000	4178	1082	1.230	--
总计		24021	100.000	4178			

图105 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-337-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:32:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:44:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

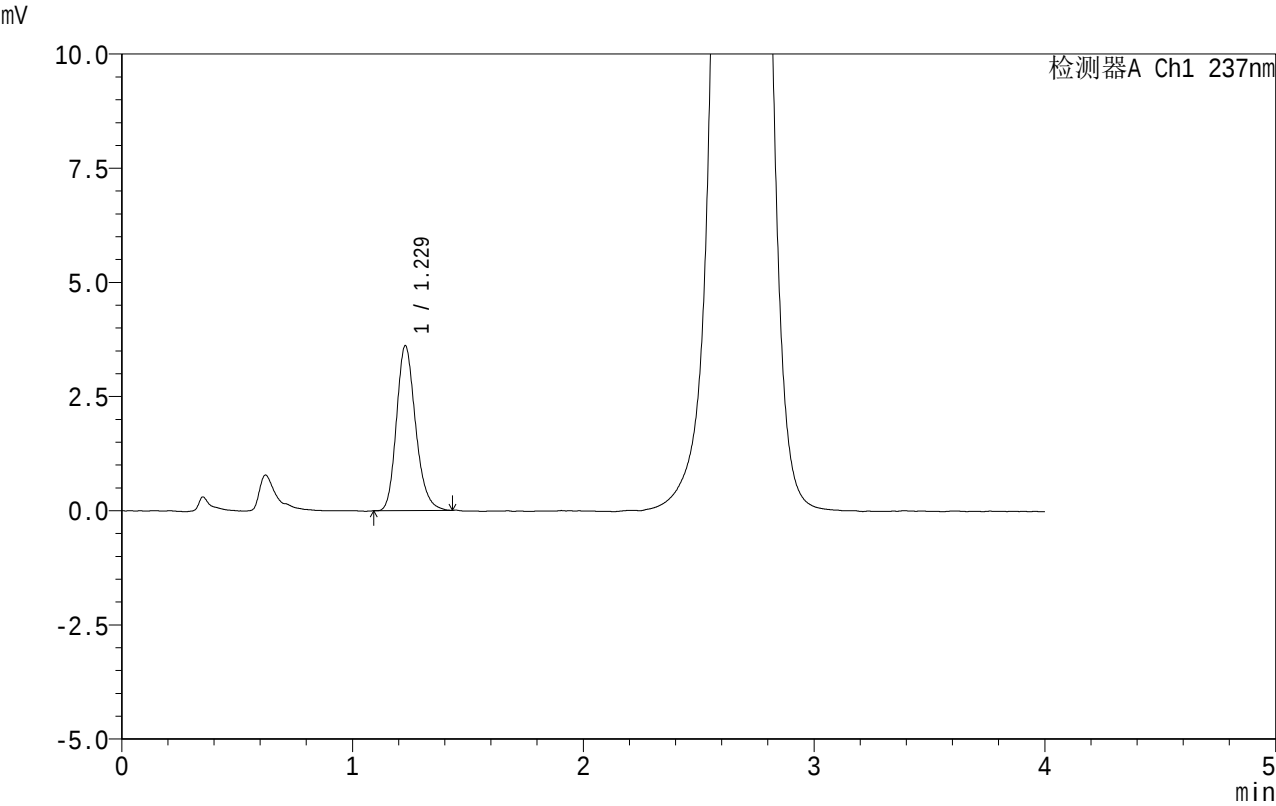

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	20759	100.000	3609	1084	1.206	--
总计		20759	100.000	3609			


图106 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-338-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 23:37:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:44:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

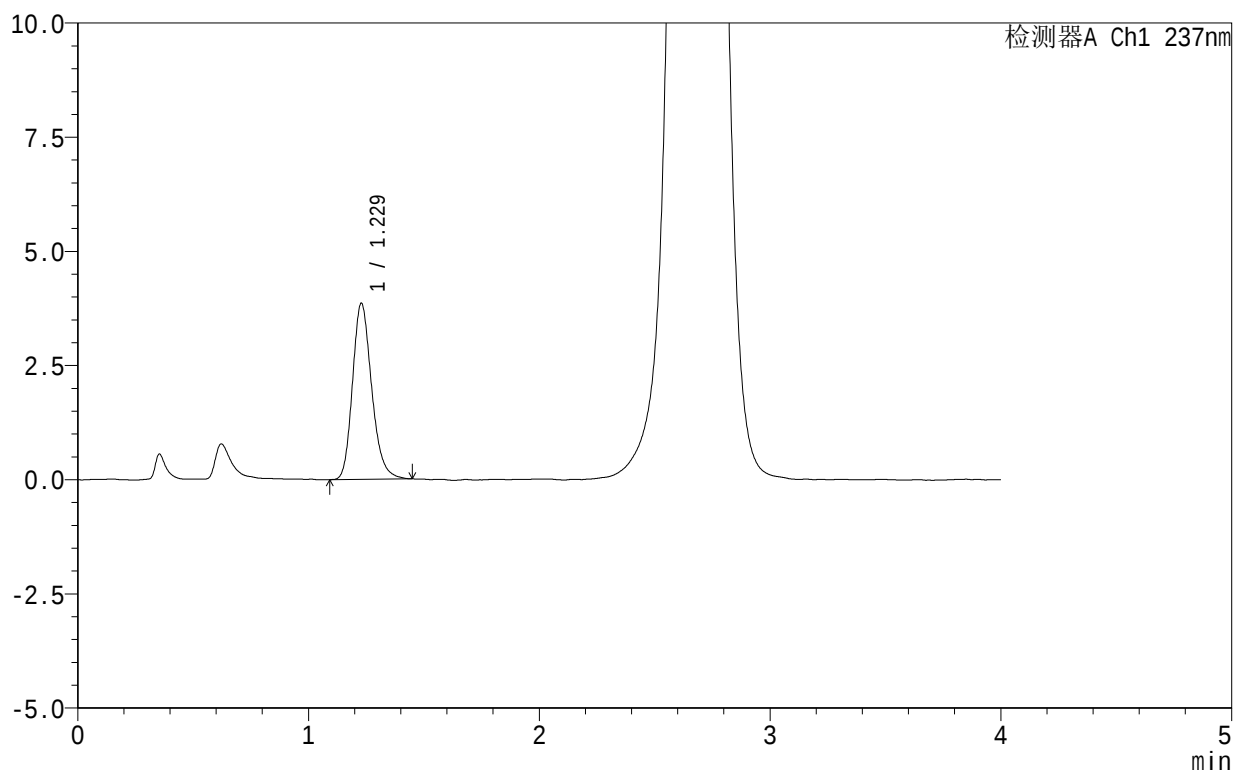

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	22226	100.000	3855	1078	1.213	--
总计		22226	100.000	3855			

图107 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-339-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:41:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:44:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

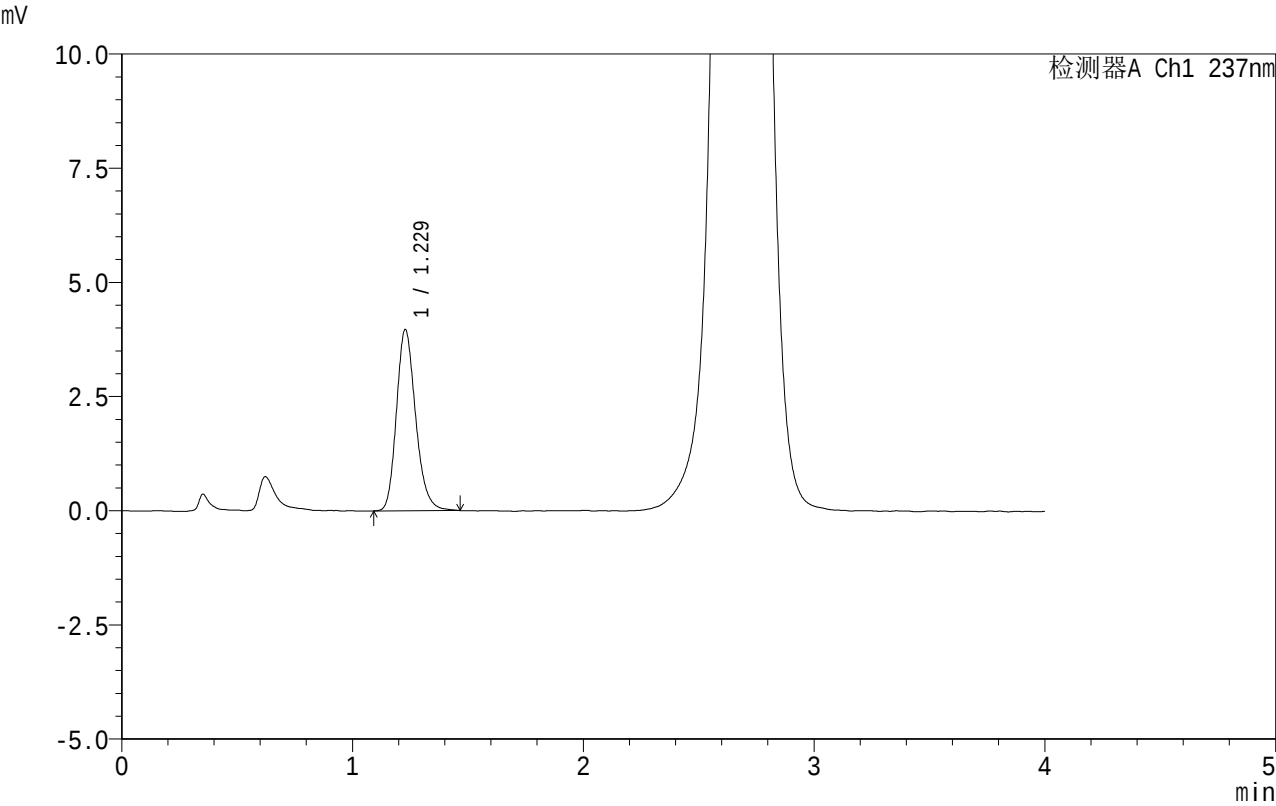

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	22909	100.000	3967	1081	1.210	--
总计		22909	100.000	3967			

图108 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-340-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:46:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:44:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

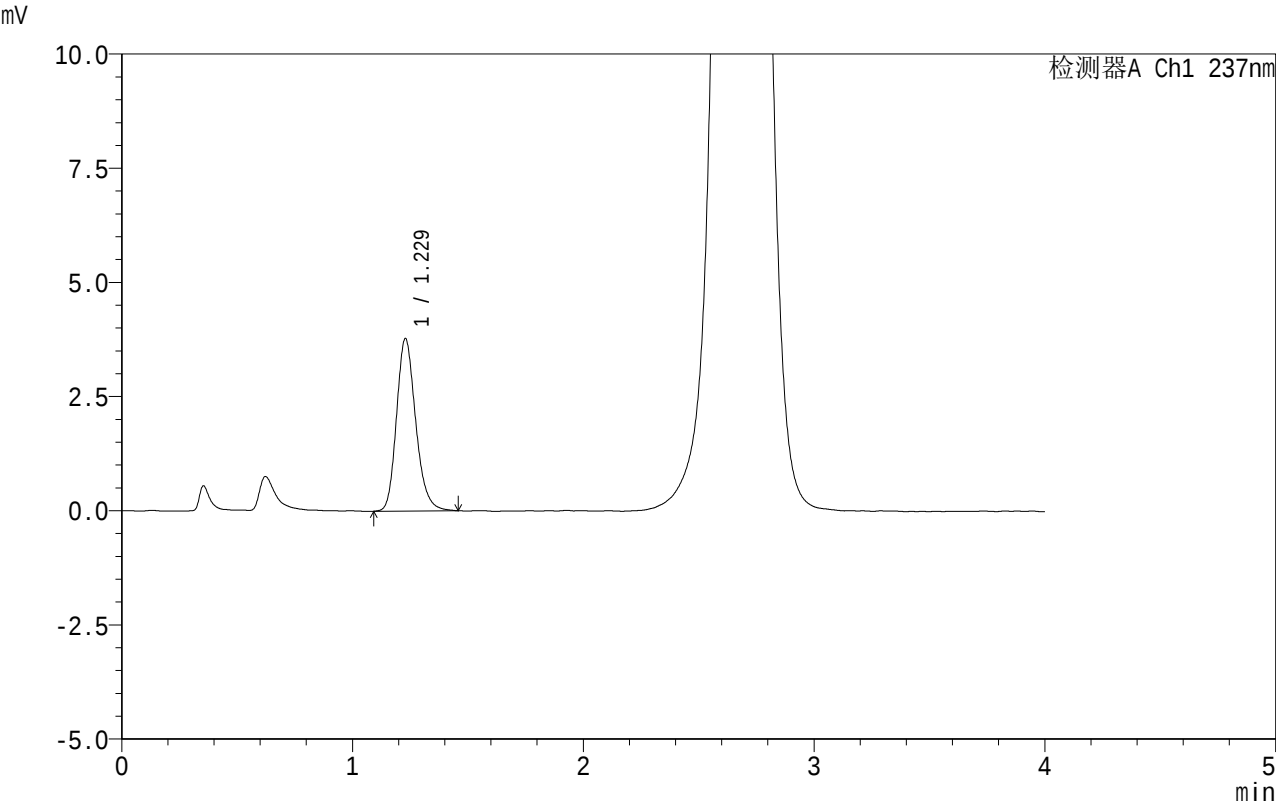

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	21831	100.000	3779	1076	1.207	--
总计		21831	100.000	3779			


图109 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-341-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 23:50:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:44:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

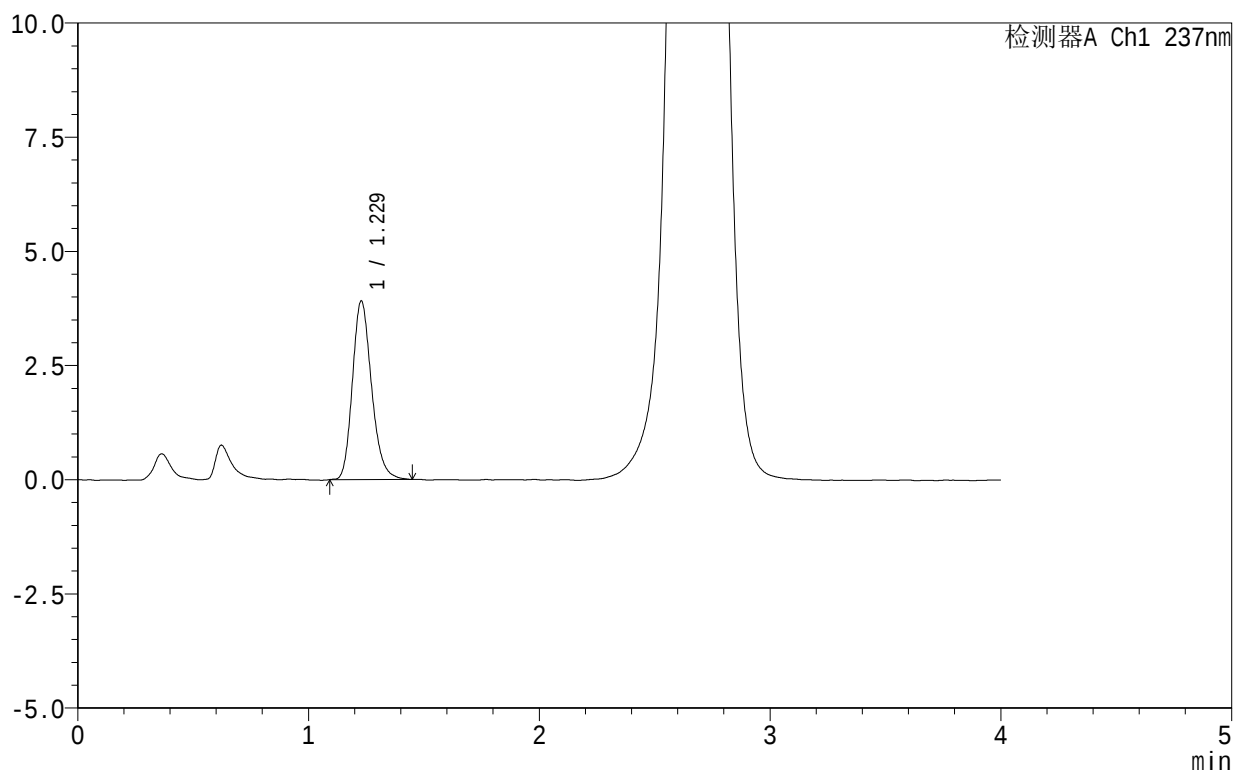

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	22545	100.000	3911	1080	1.209	--
总计		22545	100.000	3911			


图110 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-342-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 23:54:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:44:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

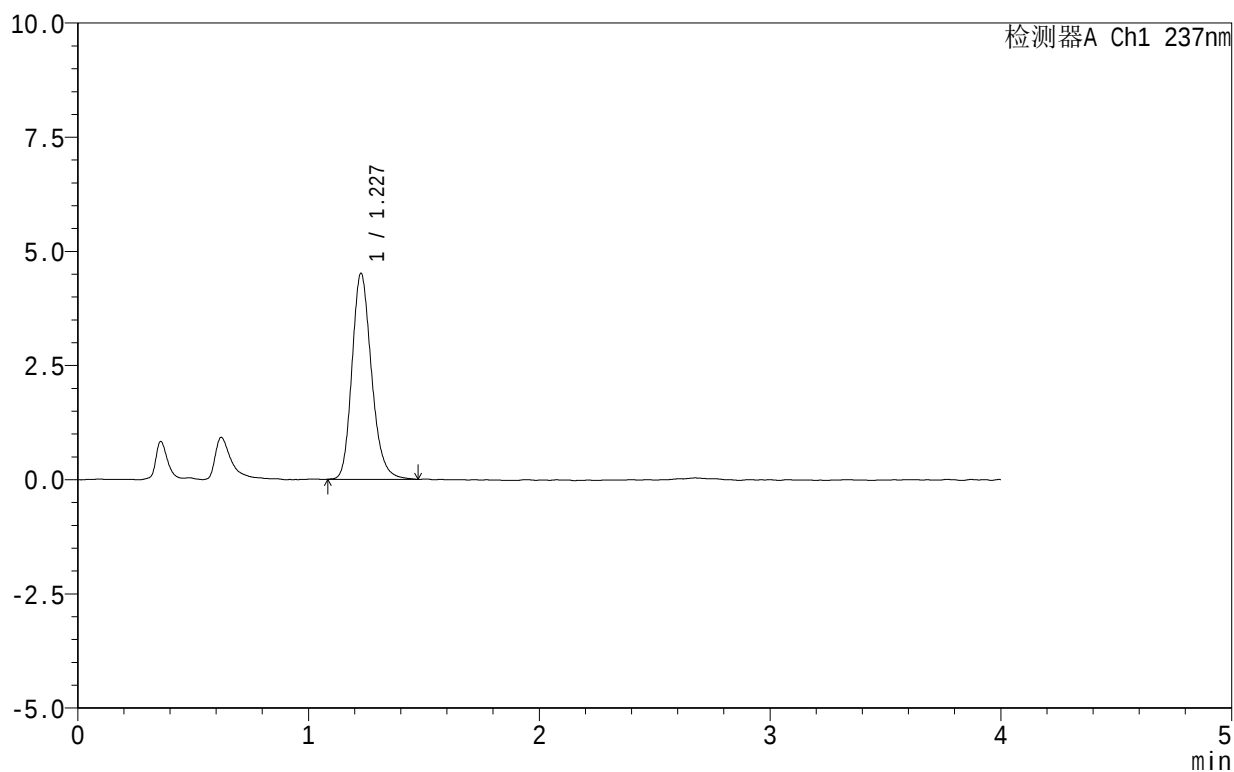

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	26504	100.000	4500	1039	1.206	--
总计		26504	100.000	4500			


图111 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-343-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH2.0-2-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 23:59:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:44:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

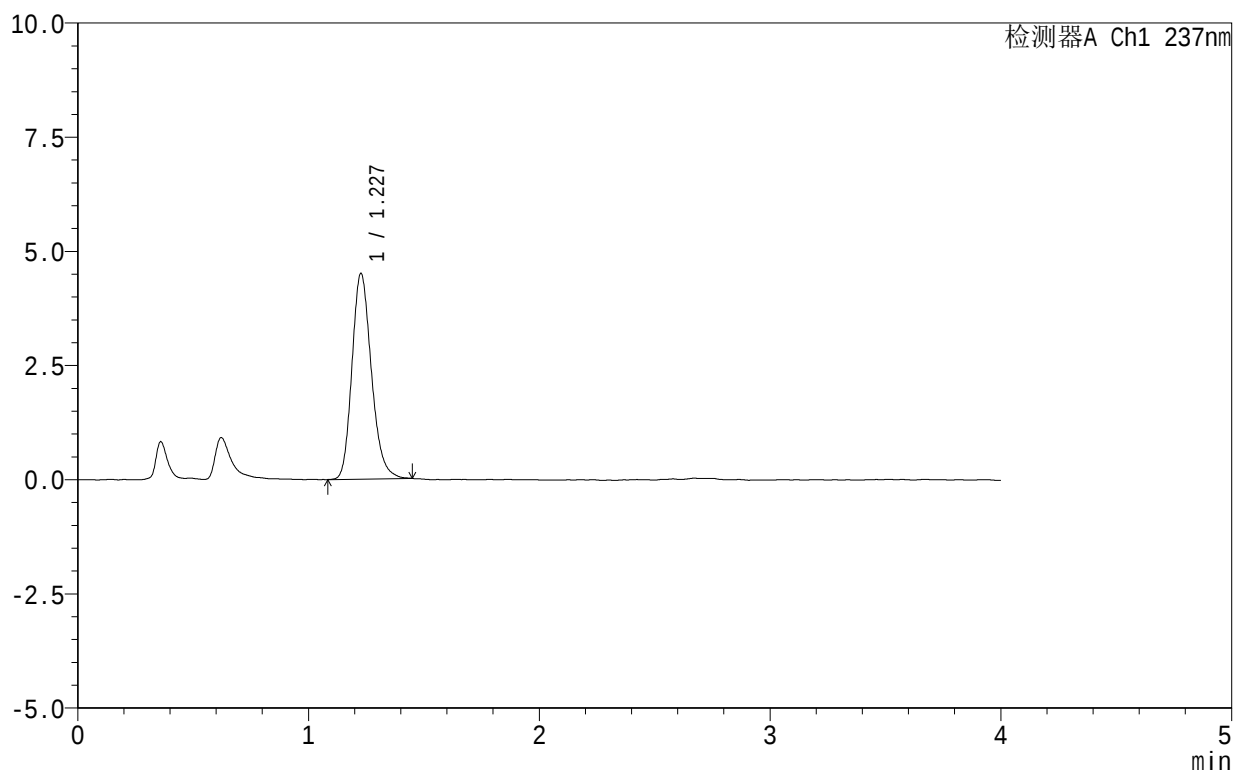

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	26323	100.000	4492	1047	1.208	--
总计		26323	100.000	4492			


图112 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-344-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:03:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:44:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

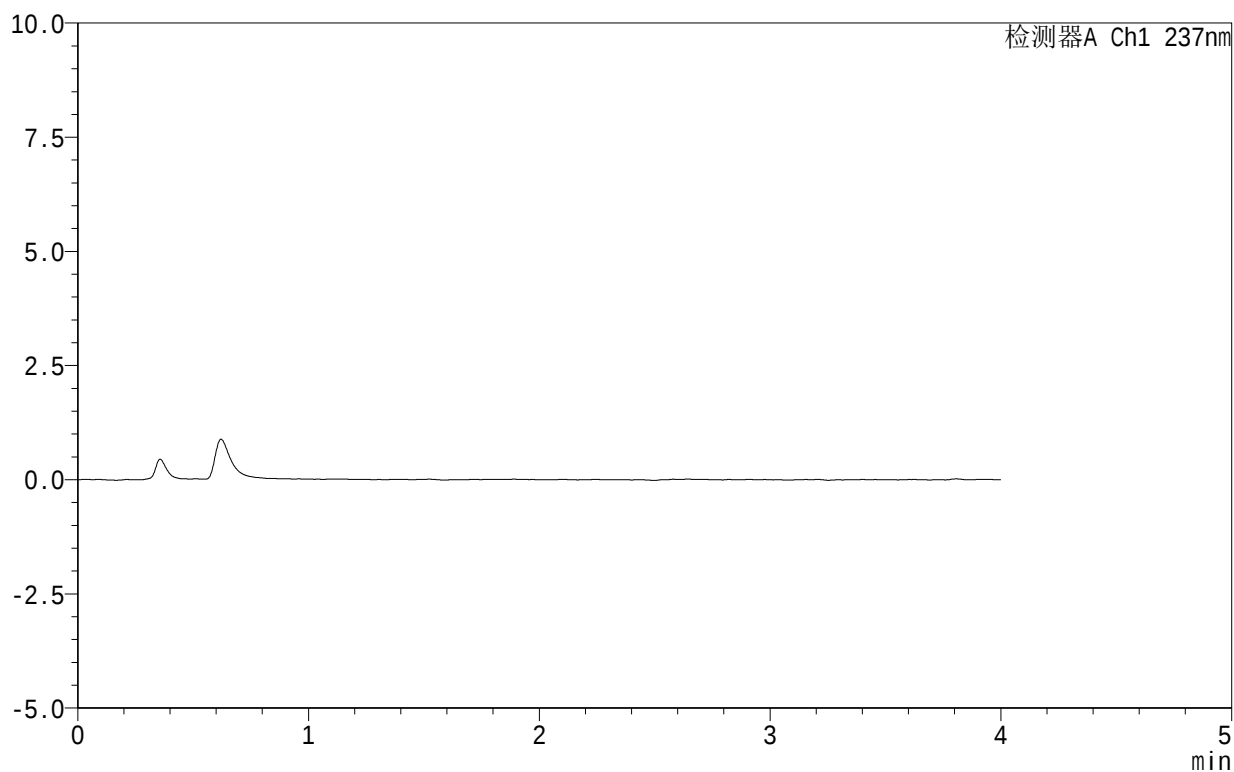

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图113 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-75转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-345-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:08:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:44:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

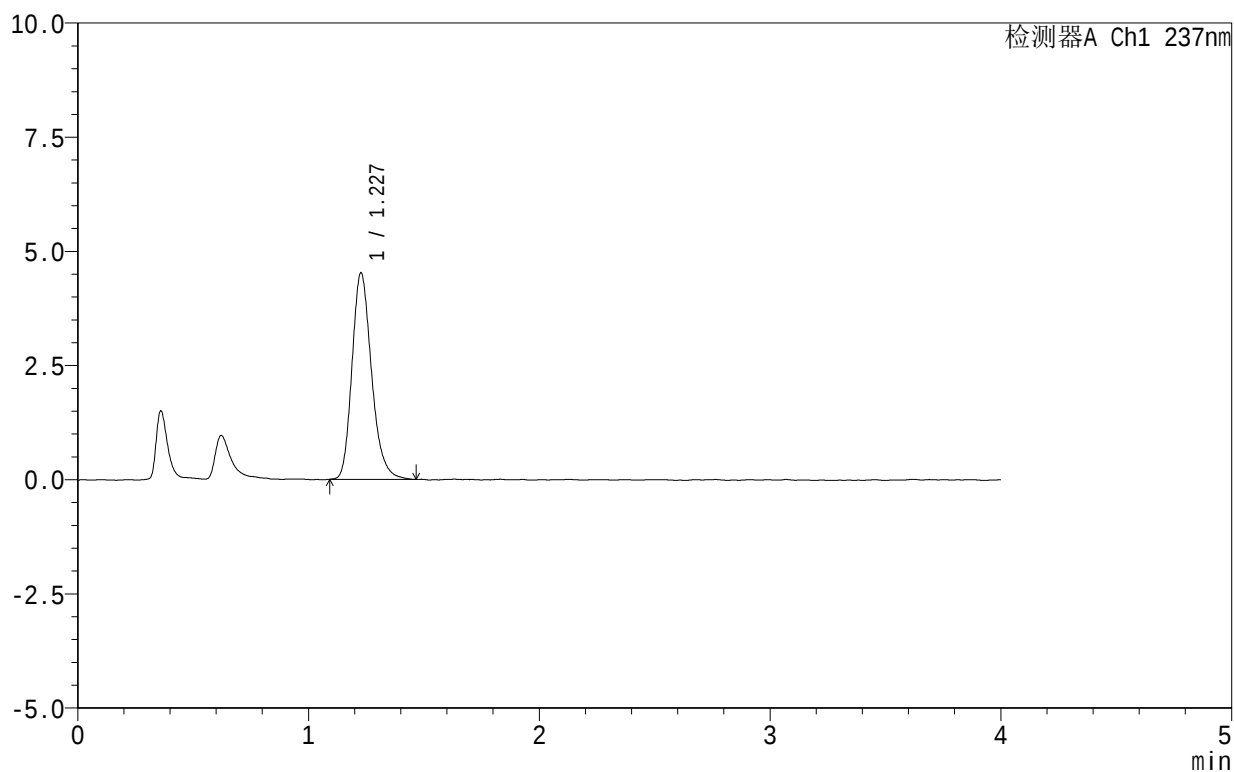

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	26575	100.000	4511	1037	1.229	--
总计		26575	100.000	4511			


图114 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-346-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:12:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:44:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

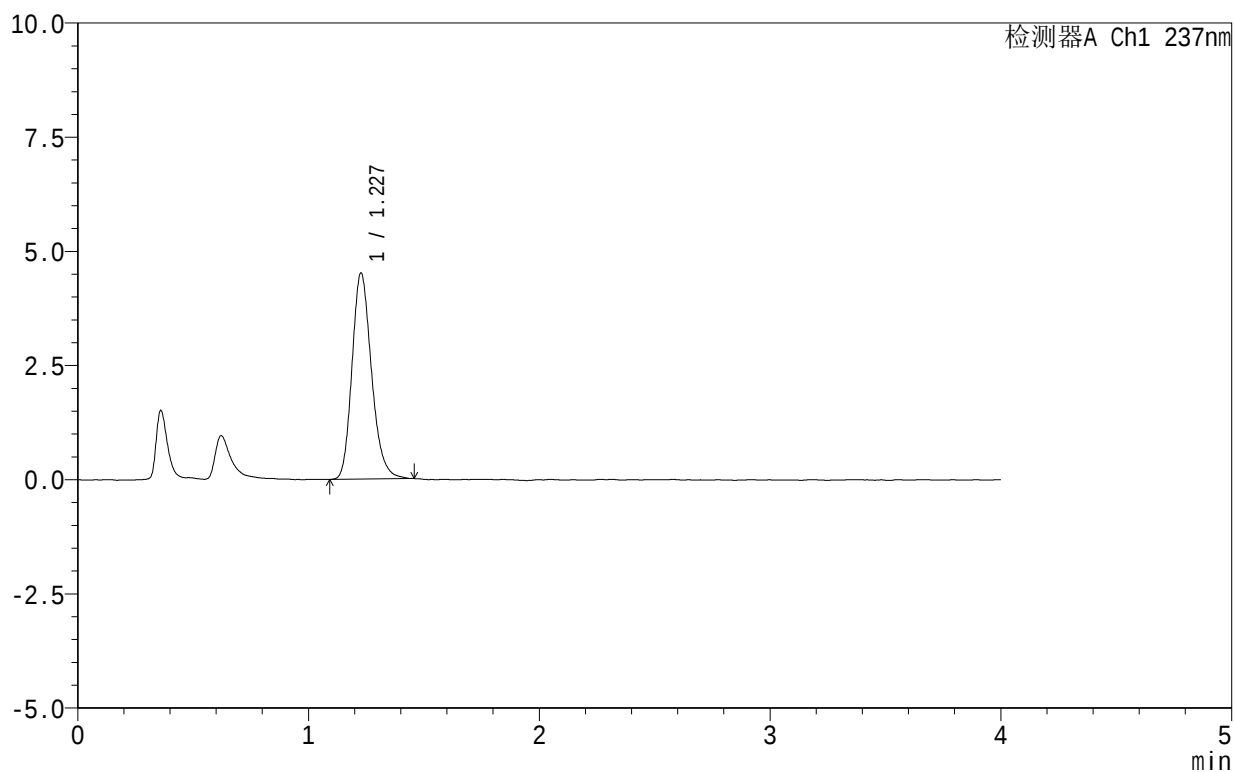

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	26462	100.000	4505	1037	1.212	--
总计		26462	100.000	4505			


图115 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-347-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:16:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:44:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

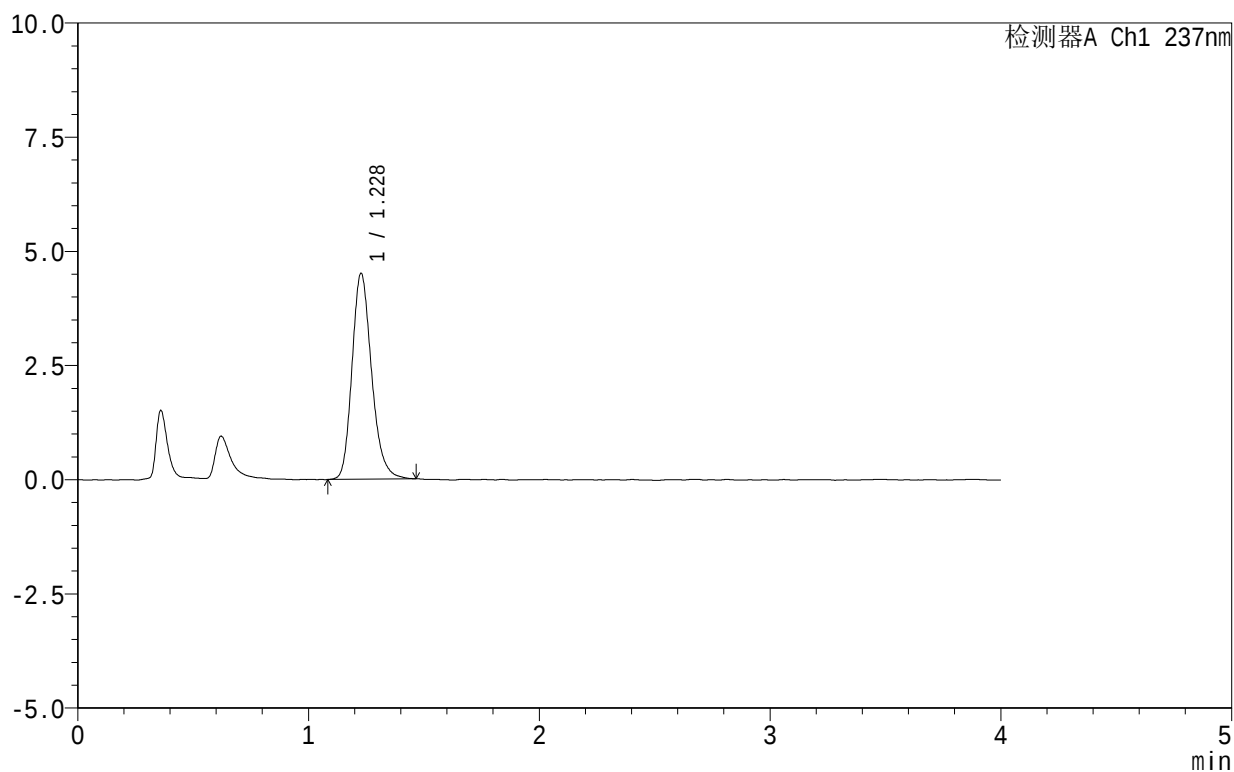

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	26586	100.000	4502	1039	1.218	--
总计		26586	100.000	4502			


图116 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-348-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:21:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:44:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

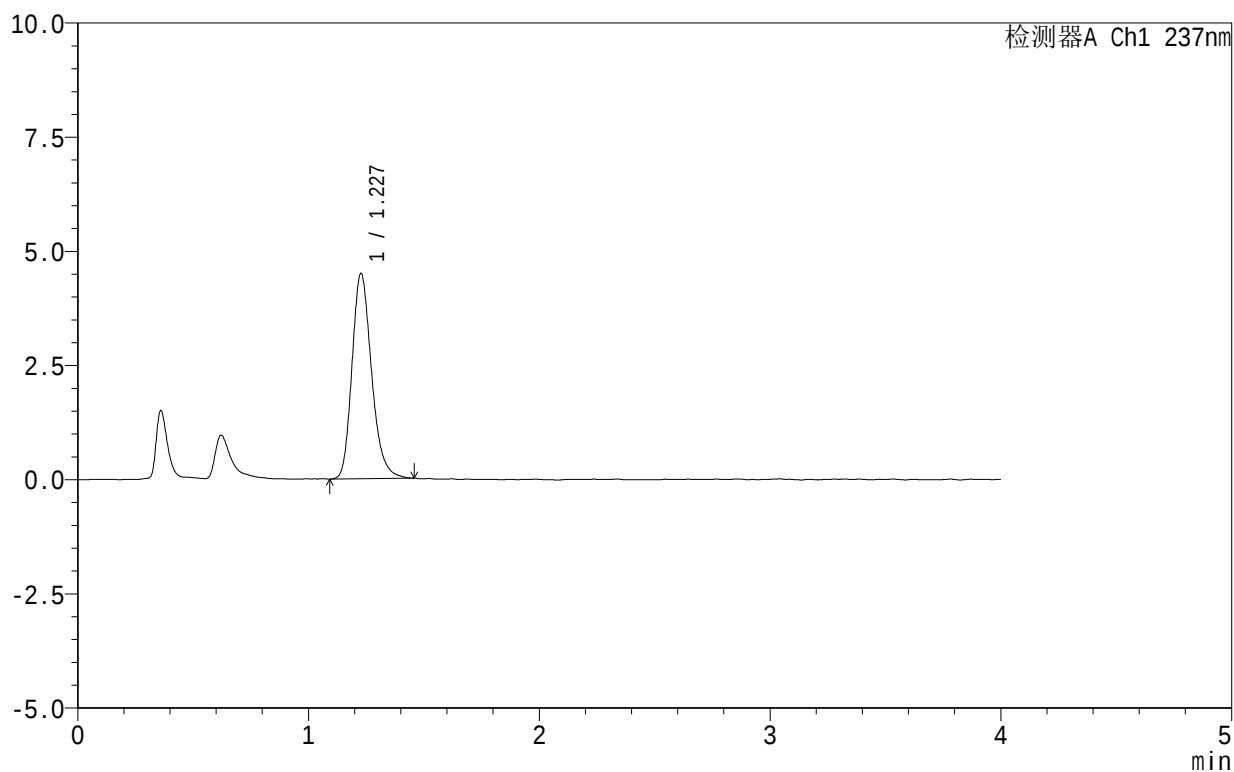

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	26475	100.000	4485	1036	1.228	--
总计		26475	100.000	4485			


图117 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-349-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:25:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:44:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

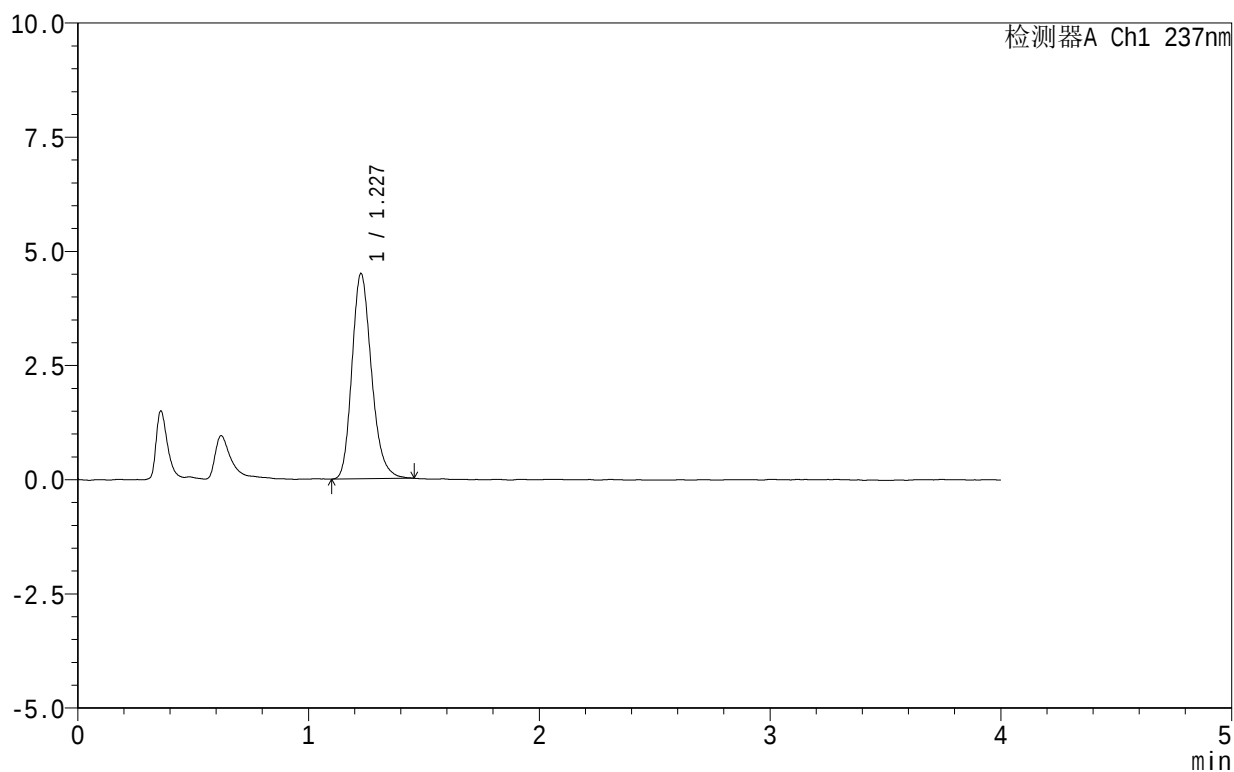

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	26387	100.000	4485	1036	1.214	--
总计		26387	100.000	4485			


图118 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-350-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:30:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:44:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

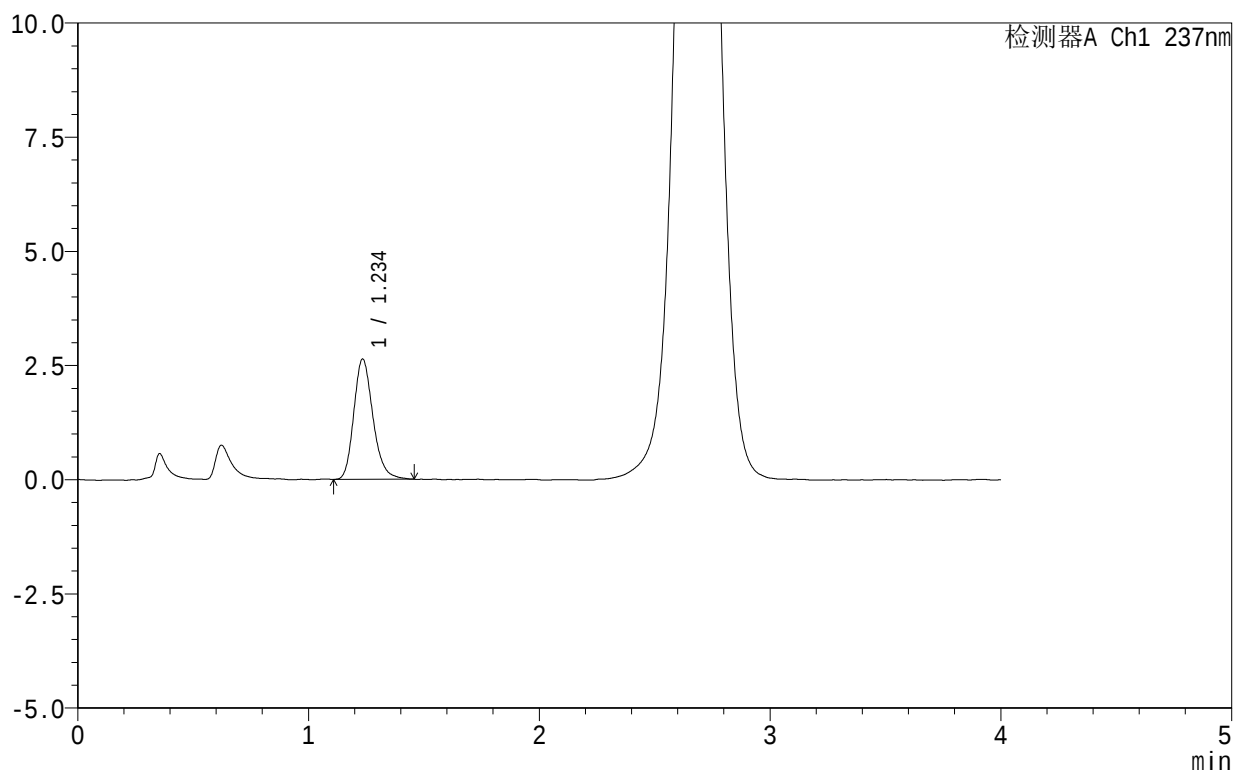

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	15208	100.000	2620	1096	1.218	--
总计		15208	100.000	2620			


图119 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-351-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:34:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:44:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

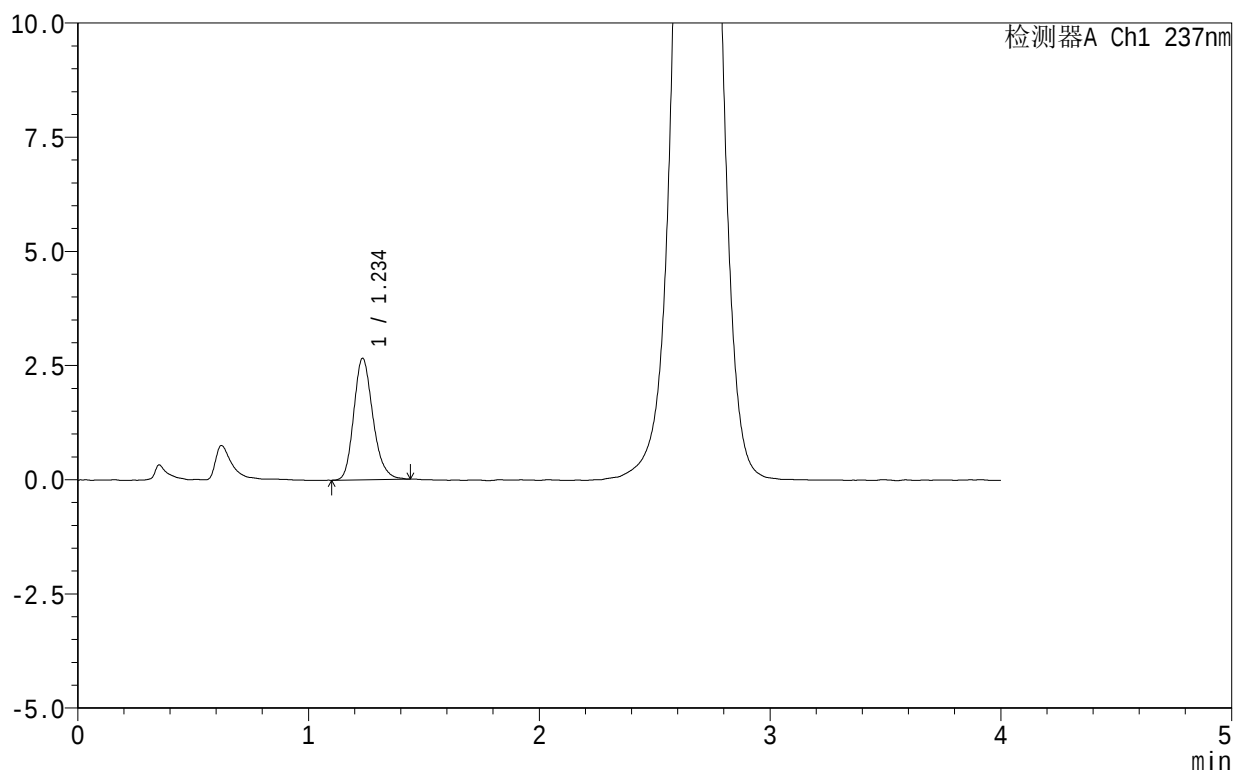

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	15331	100.000	2647	1090	1.212	--
总计		15331	100.000	2647			


图120 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-352-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:38:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:44:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

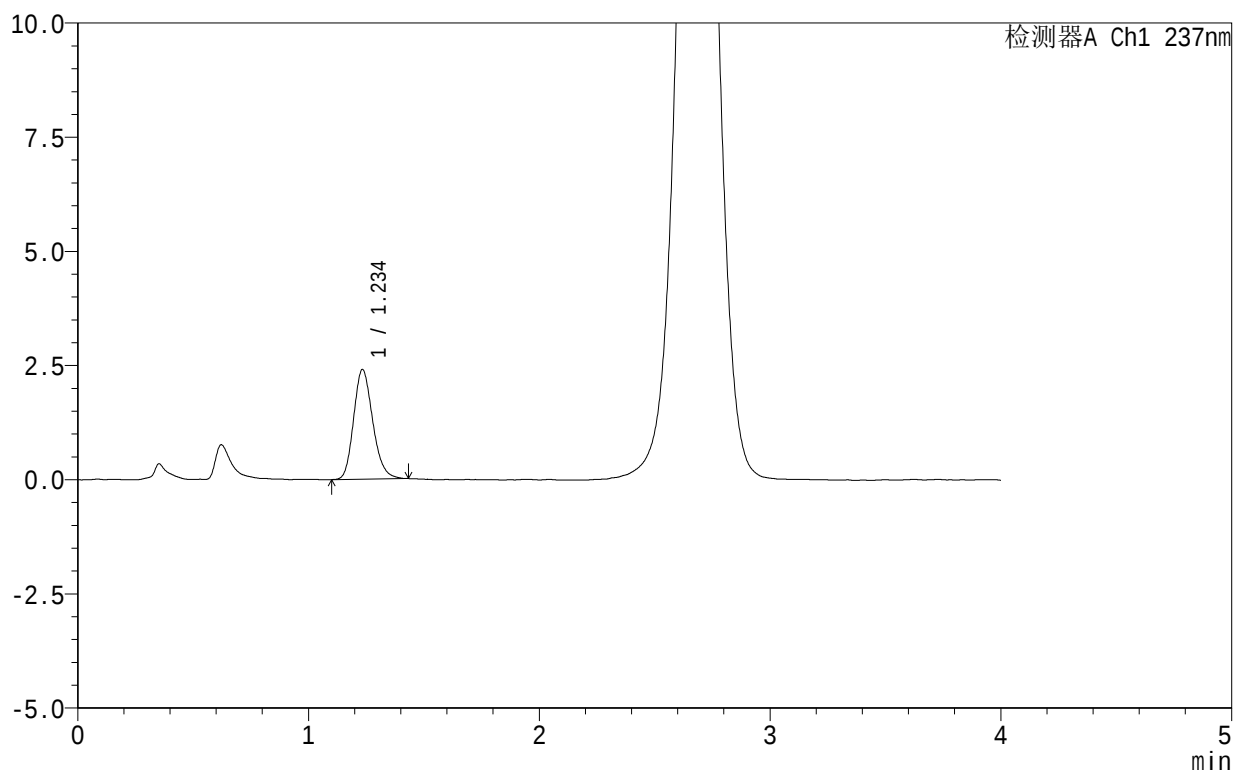

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	13845	100.000	2392	1071	1.196	--
总计		13845	100.000	2392			


图121 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-353-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:43:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:44:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

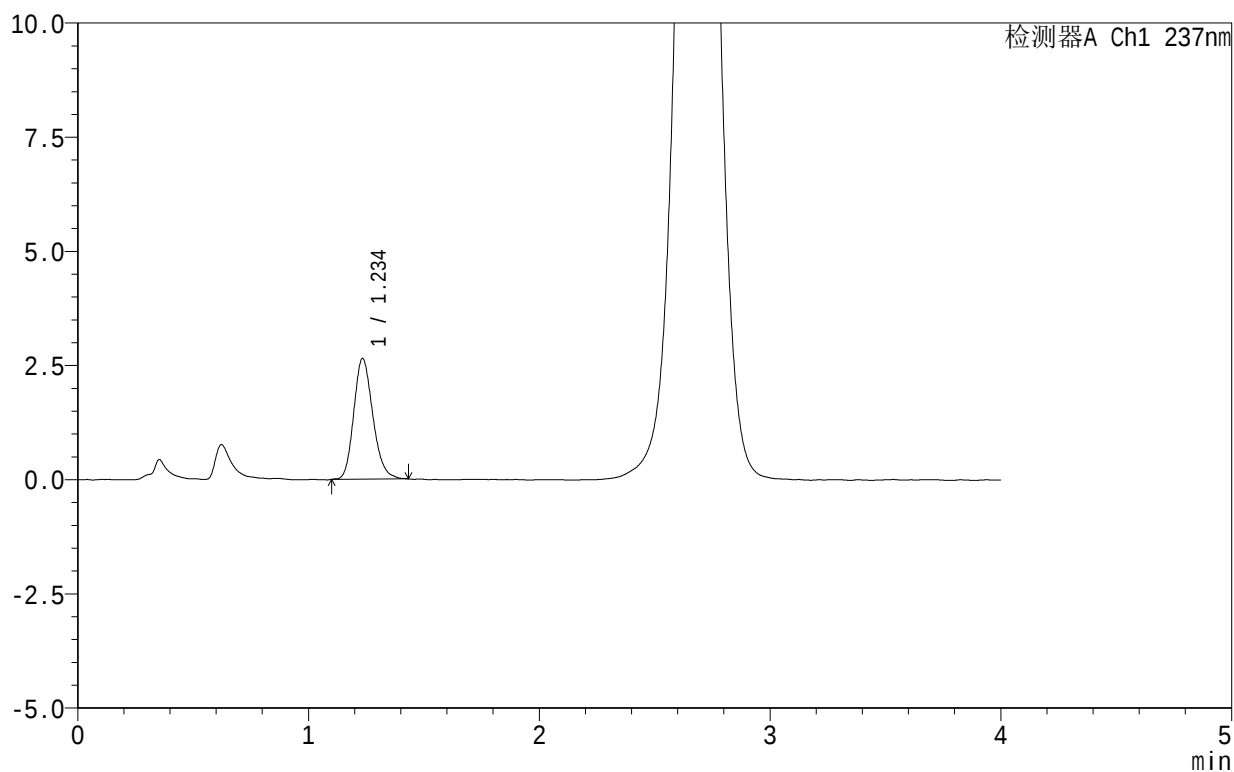

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	15197	100.000	2629	1081	1.190	--
总计		15197	100.000	2629			

图122 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-354-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 00:47:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:44:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

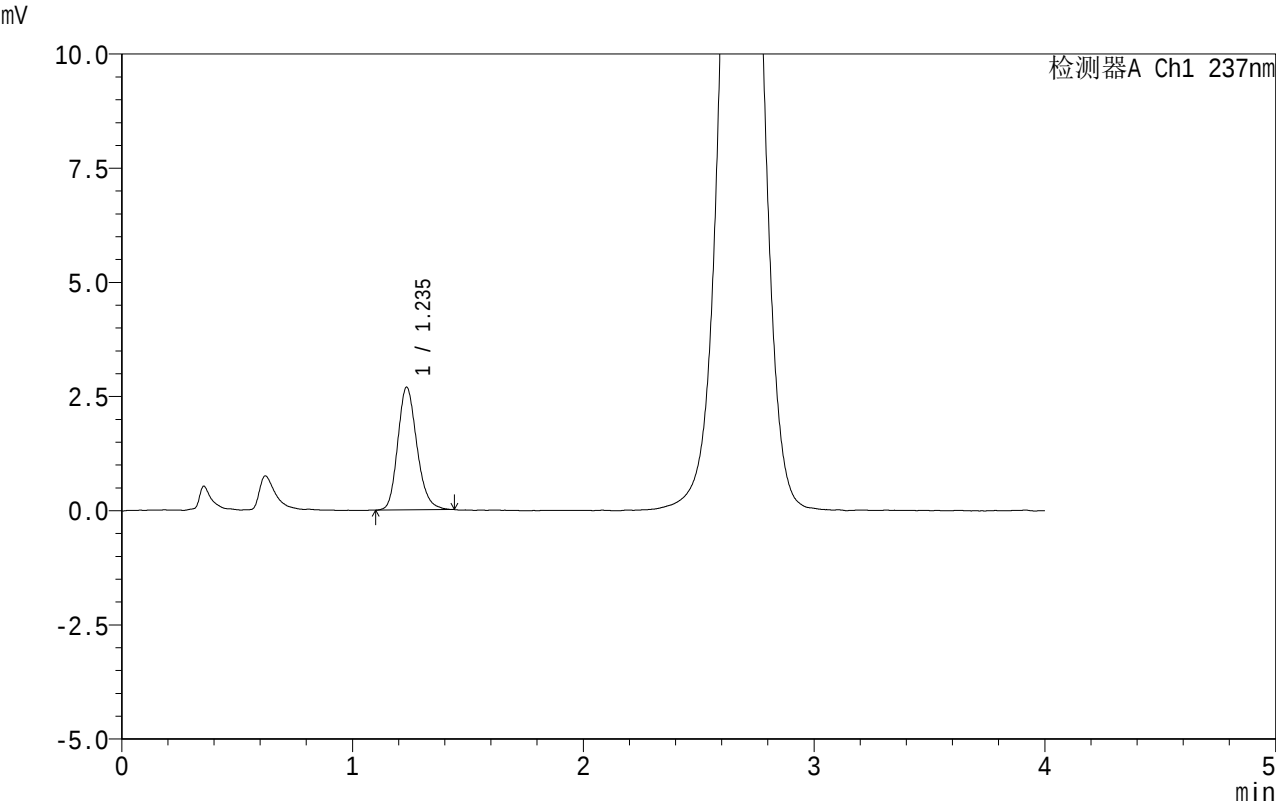

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	15523	100.000	2674	1077	1.197	--
总计		15523	100.000	2674			


图123 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-355-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:51:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:44:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

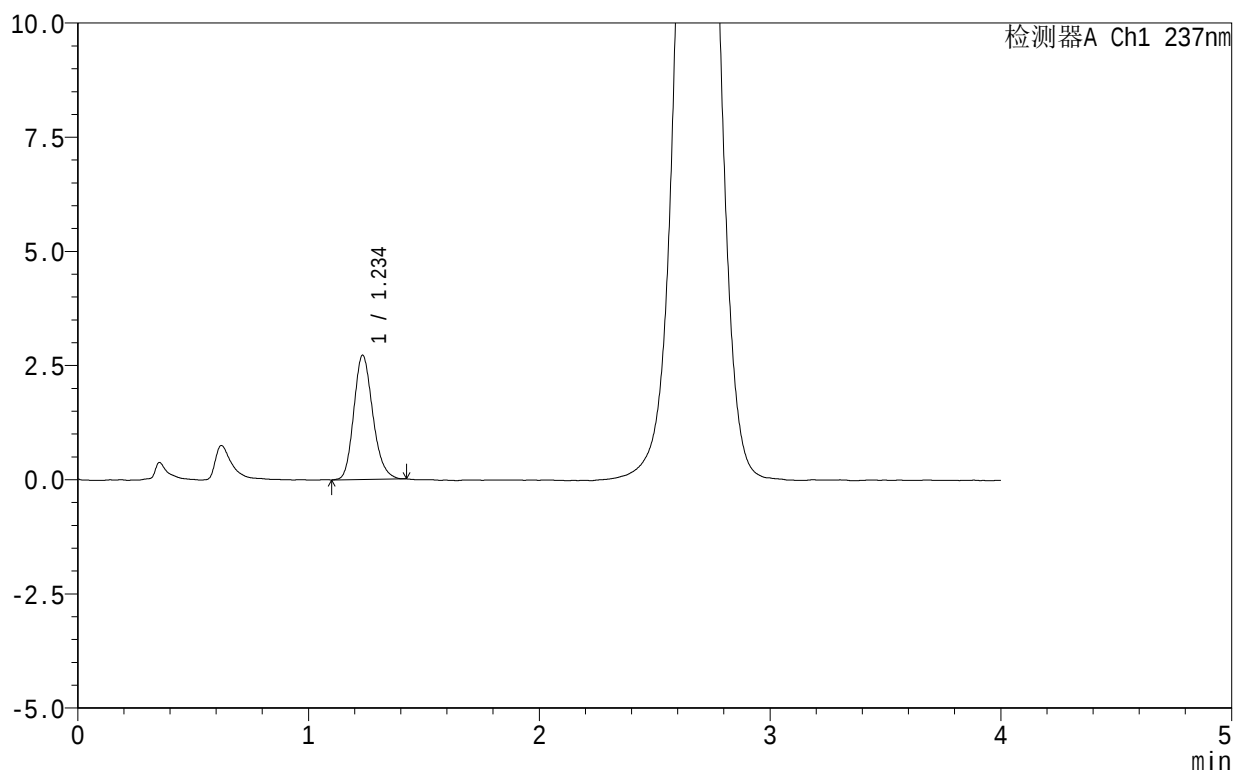

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	15568	100.000	2706	1093	1.191	--
总计		15568	100.000	2706			


图124 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-356-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:56:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:44:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

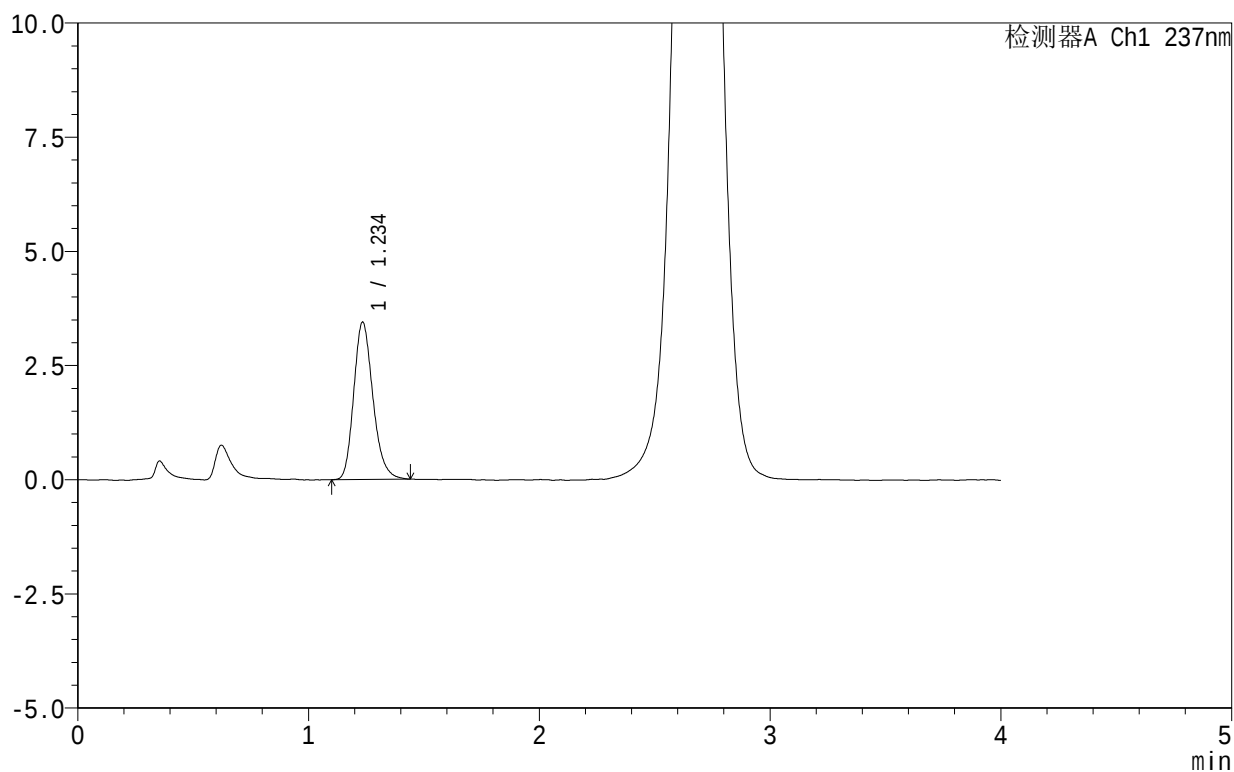

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	19901	100.000	3428	1083	1.215	--
总计		19901	100.000	3428			


图125 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-357-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:00:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

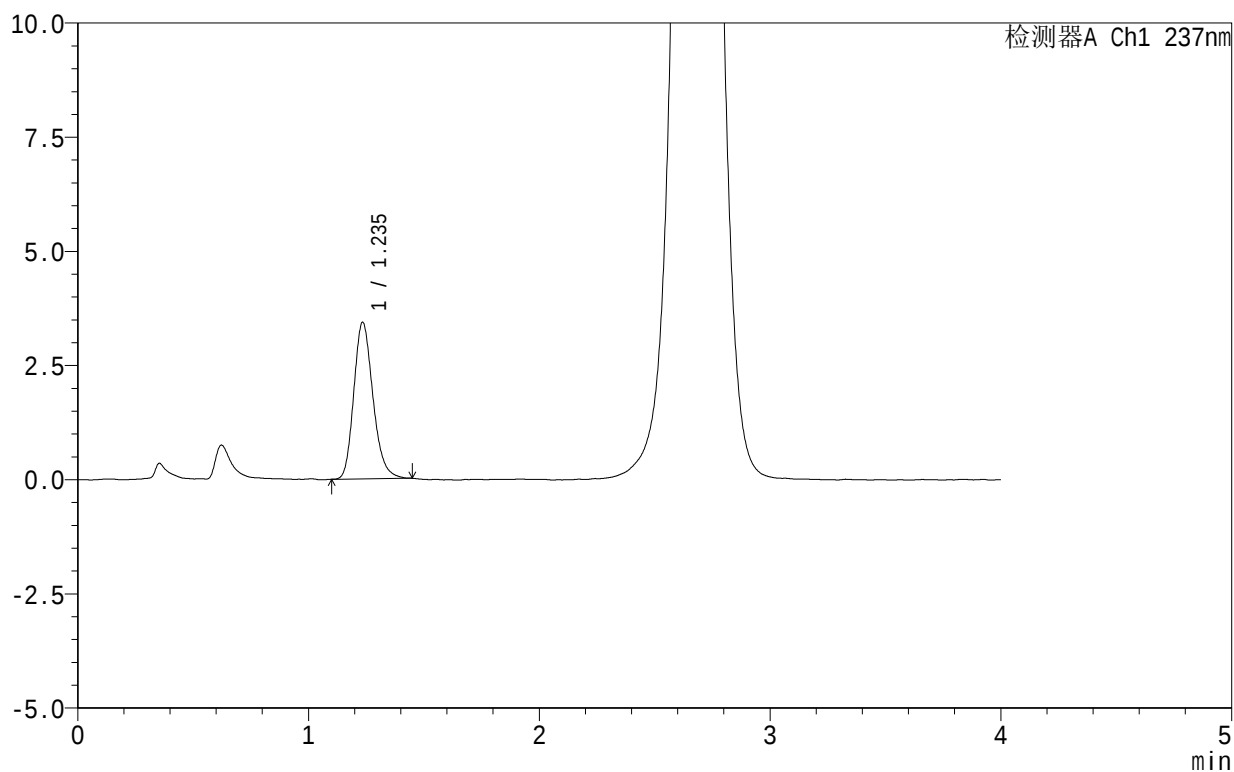

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	19783	100.000	3413	1085	1.211	--
总计		19783	100.000	3413			


图126 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-358-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:05:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

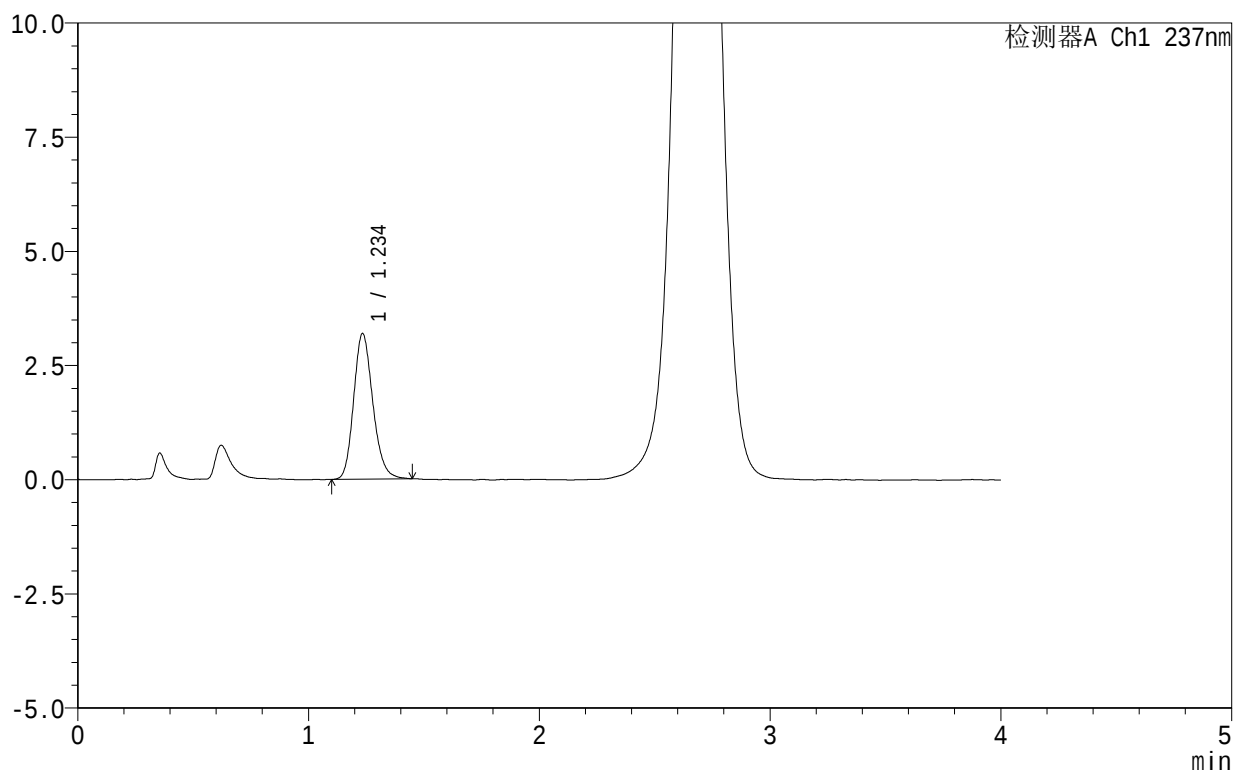

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	18416	100.000	3170	1079	1.186	--
总计		18416	100.000	3170			


图127 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-359-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:09:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

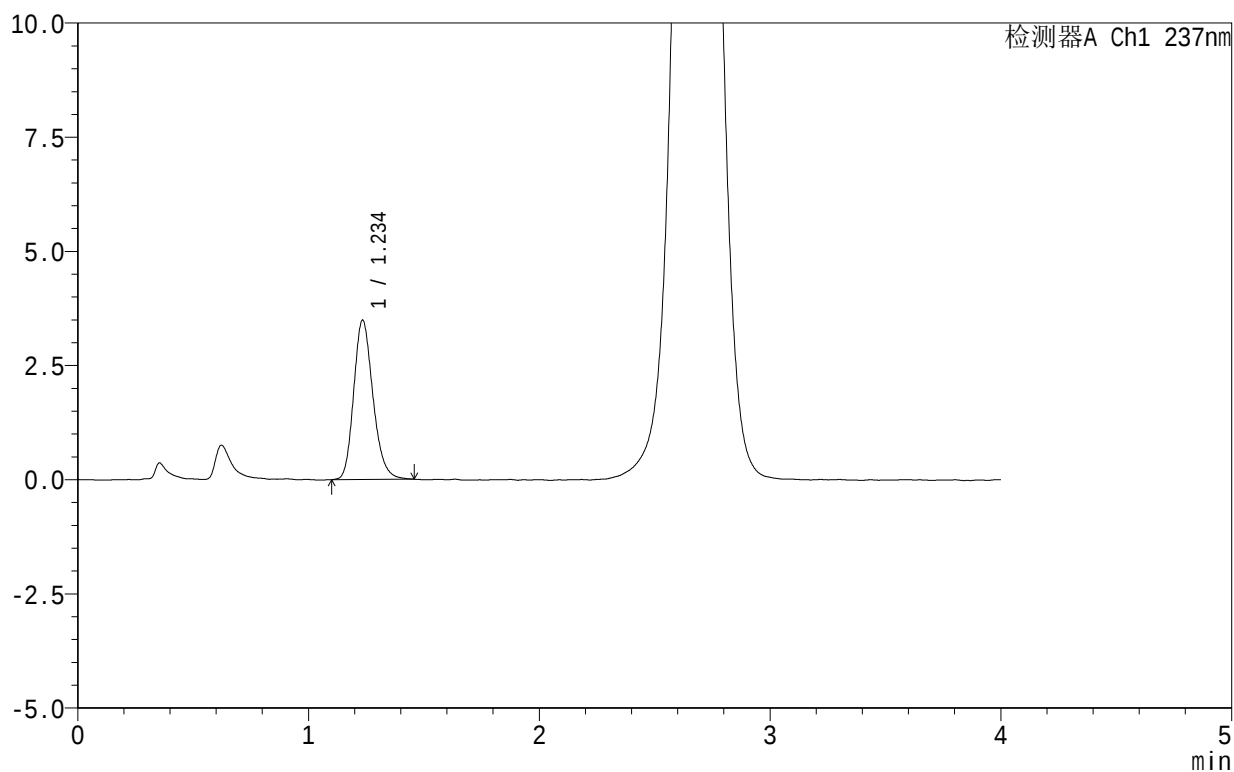

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	20227	100.000	3469	1076	1.205	--
总计		20227	100.000	3469			


图128 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-360-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:13:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

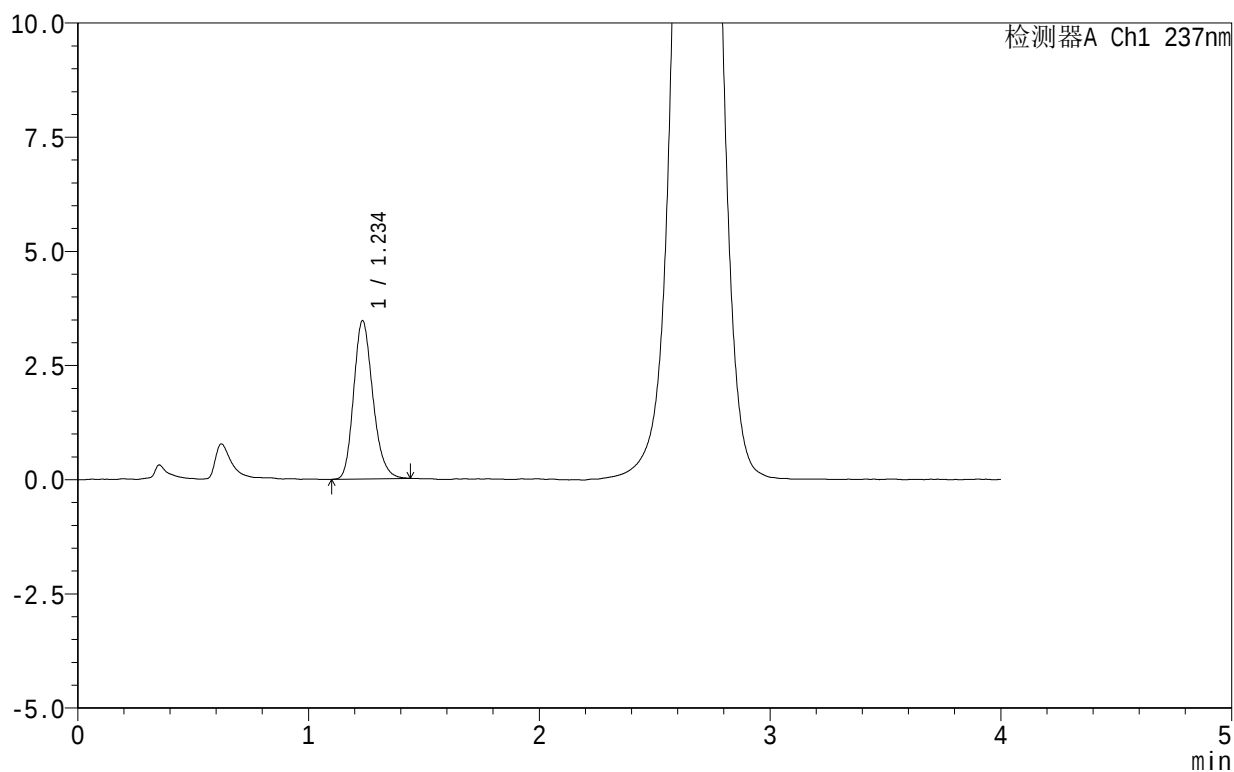

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	19988	100.000	3445	1076	1.206	--
总计		19988	100.000	3445			


图129 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-361-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:18:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

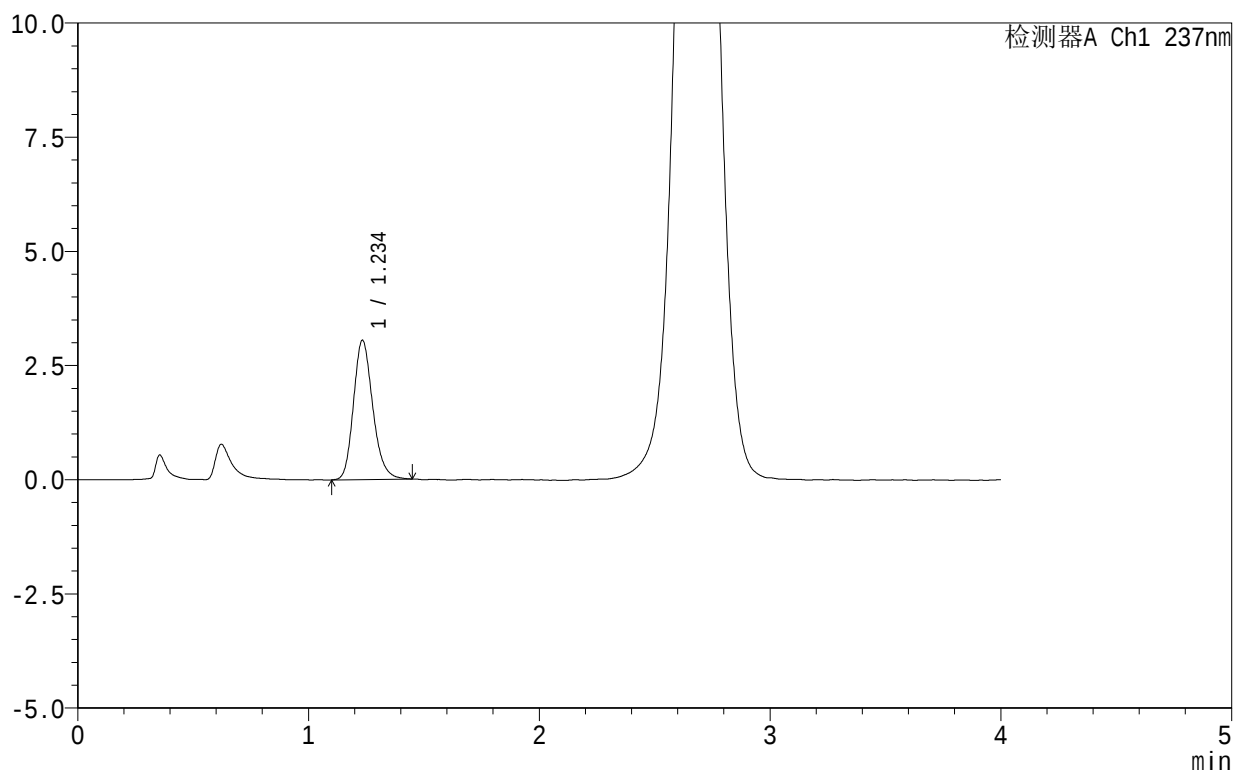

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	17708	100.000	3038	1070	1.200	--
总计		17708	100.000	3038			


图130 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-362-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:22:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

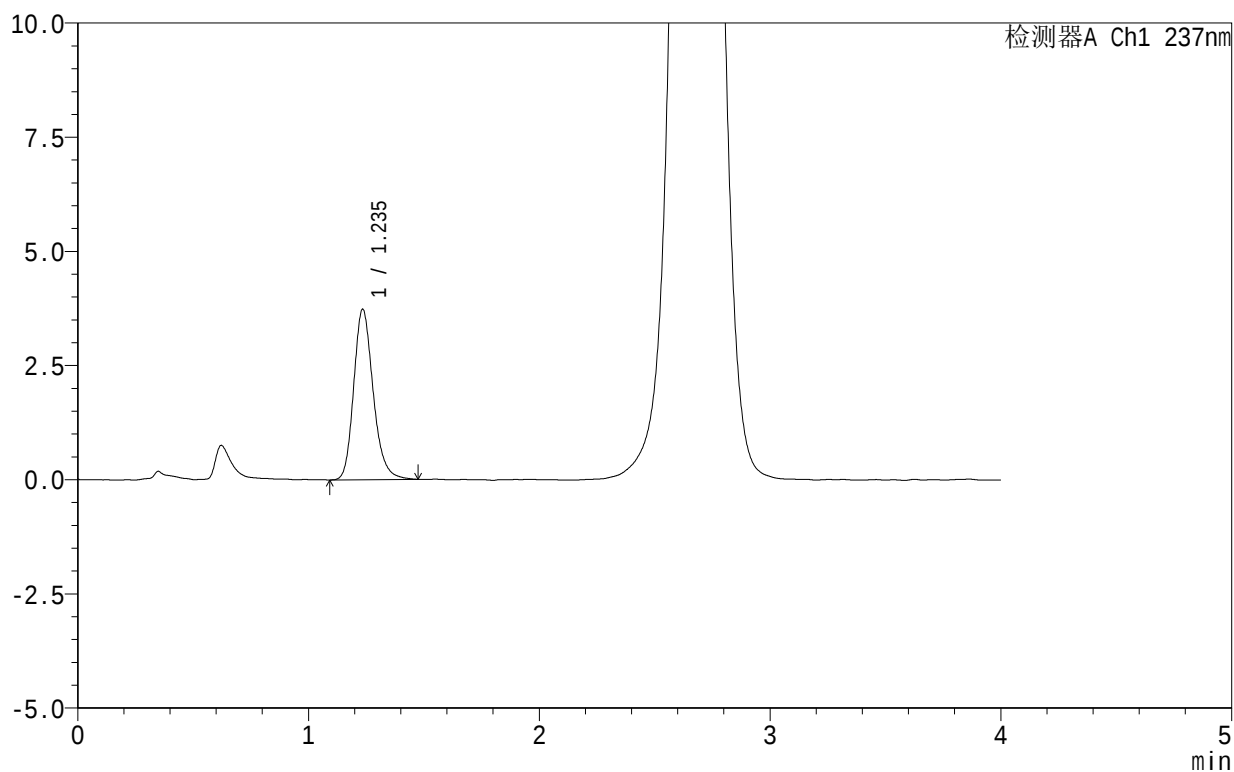

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	21887	100.000	3717	1068	1.214	--
总计		21887	100.000	3717			


图131 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-363-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:26:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

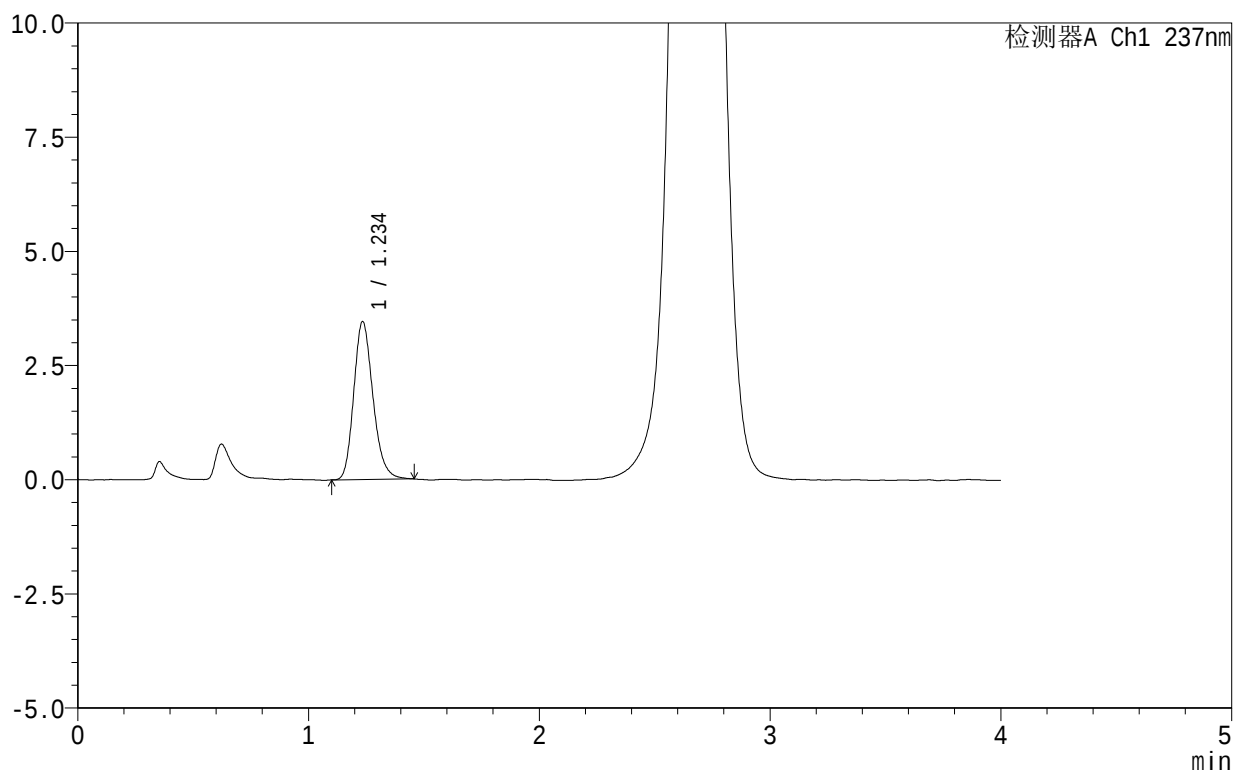

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	19989	100.000	3441	1078	1.208	--
总计		19989	100.000	3441			


图132 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-364-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:31:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

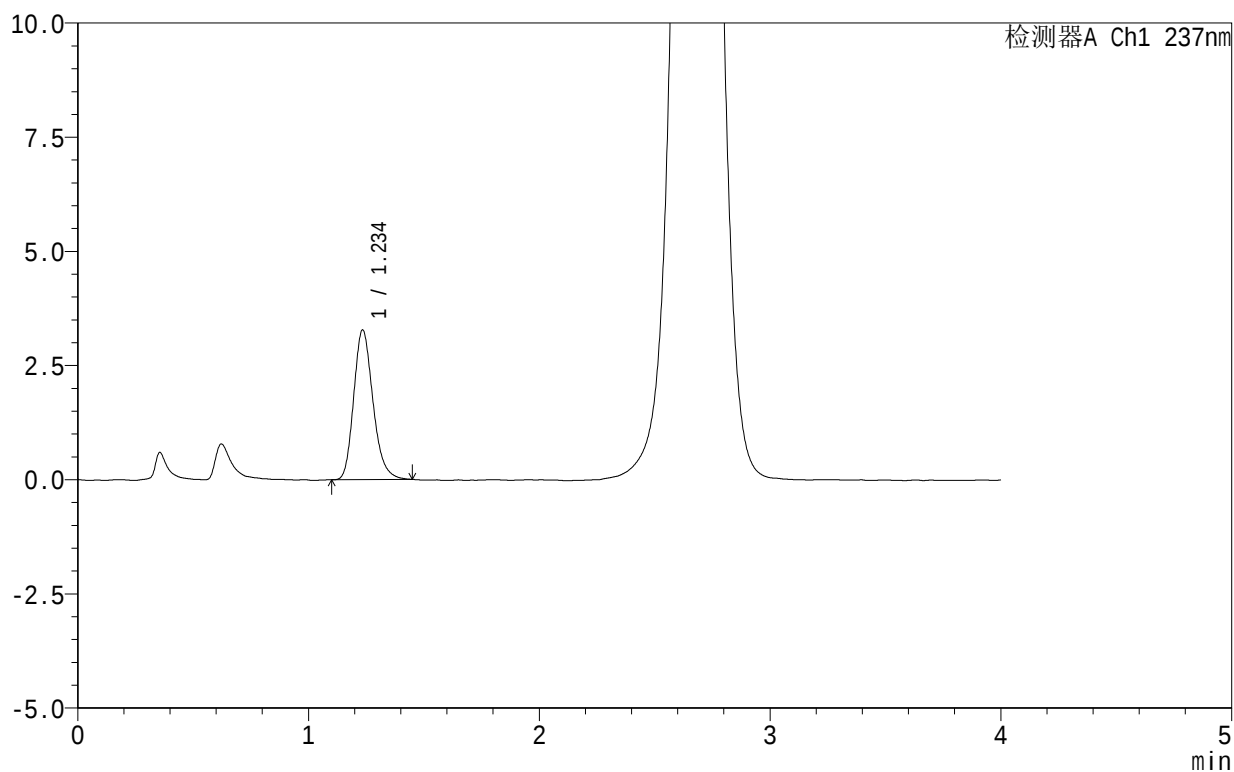

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	18986	100.000	3259	1066	1.218	--
总计		18986	100.000	3259			


图133 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-365-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:35:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

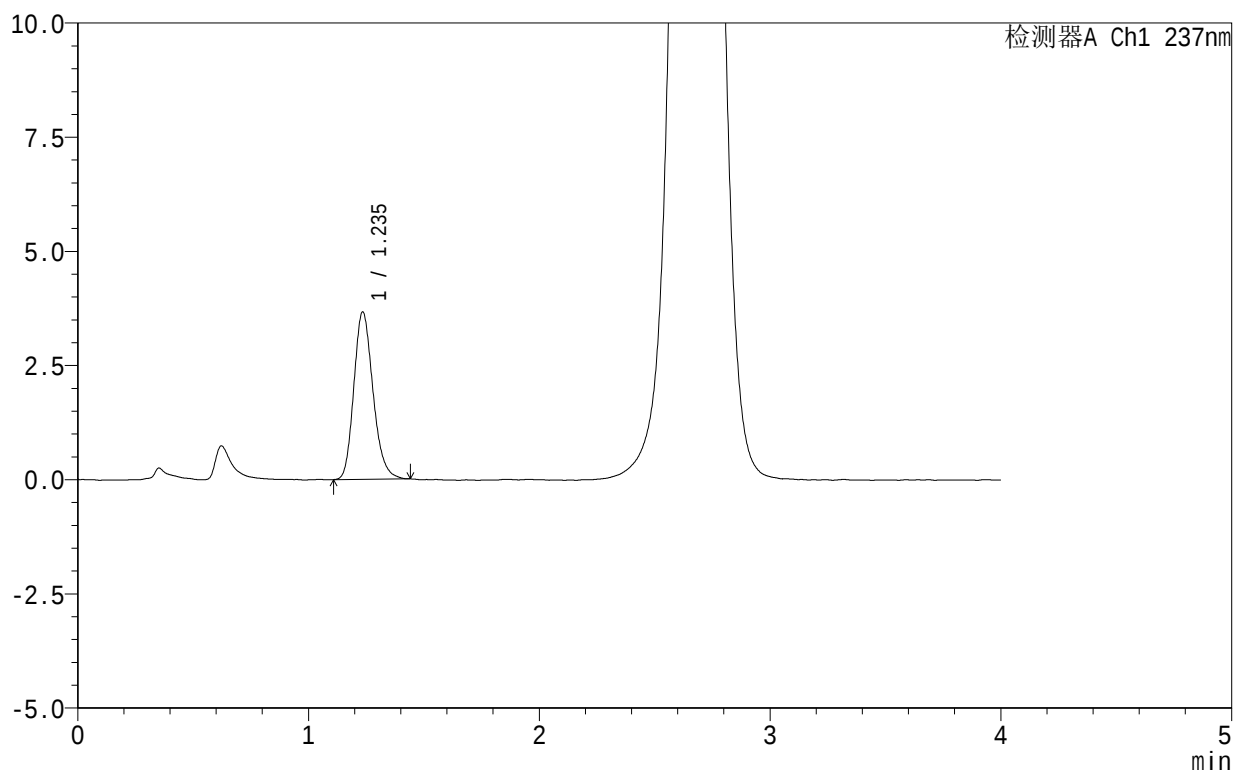

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	21144	100.000	3650	1077	1.204	--
总计		21144	100.000	3650			


图134 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-366-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:40:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

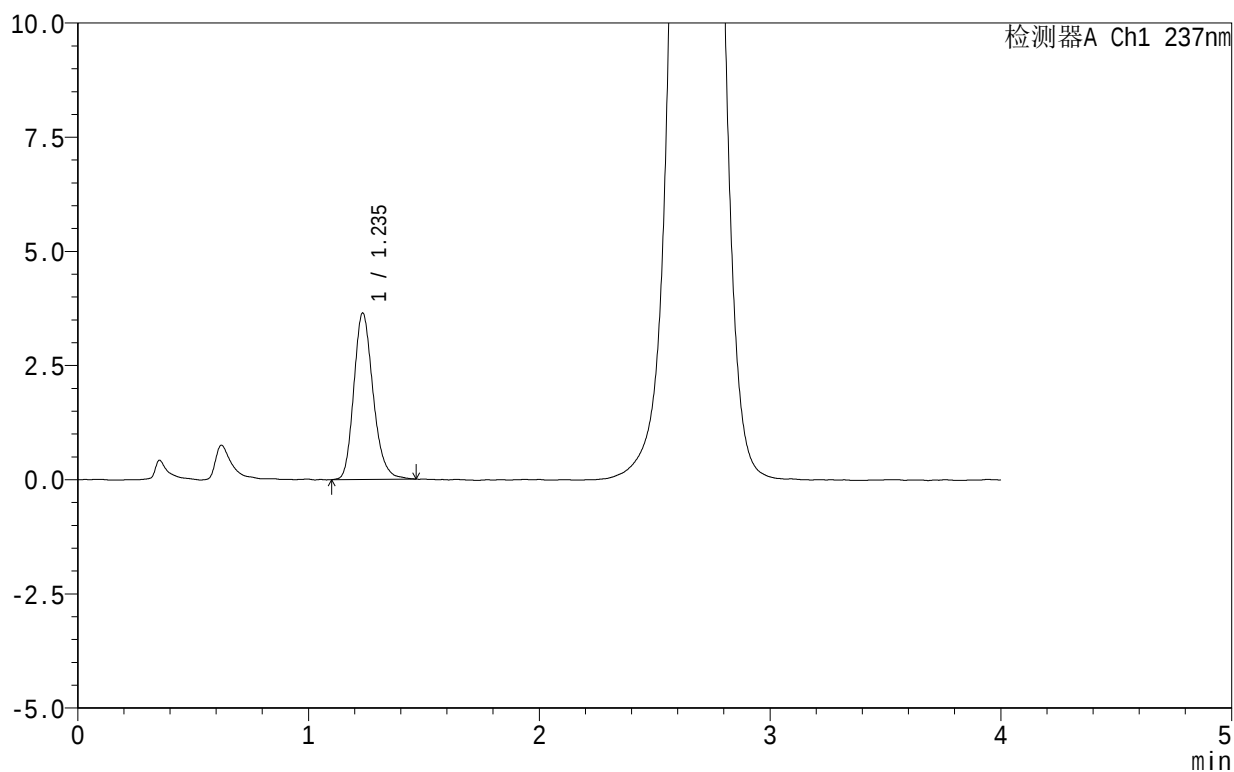

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	21183	100.000	3631	1072	1.215	--
总计		21183	100.000	3631			


图135 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-367-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:44:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

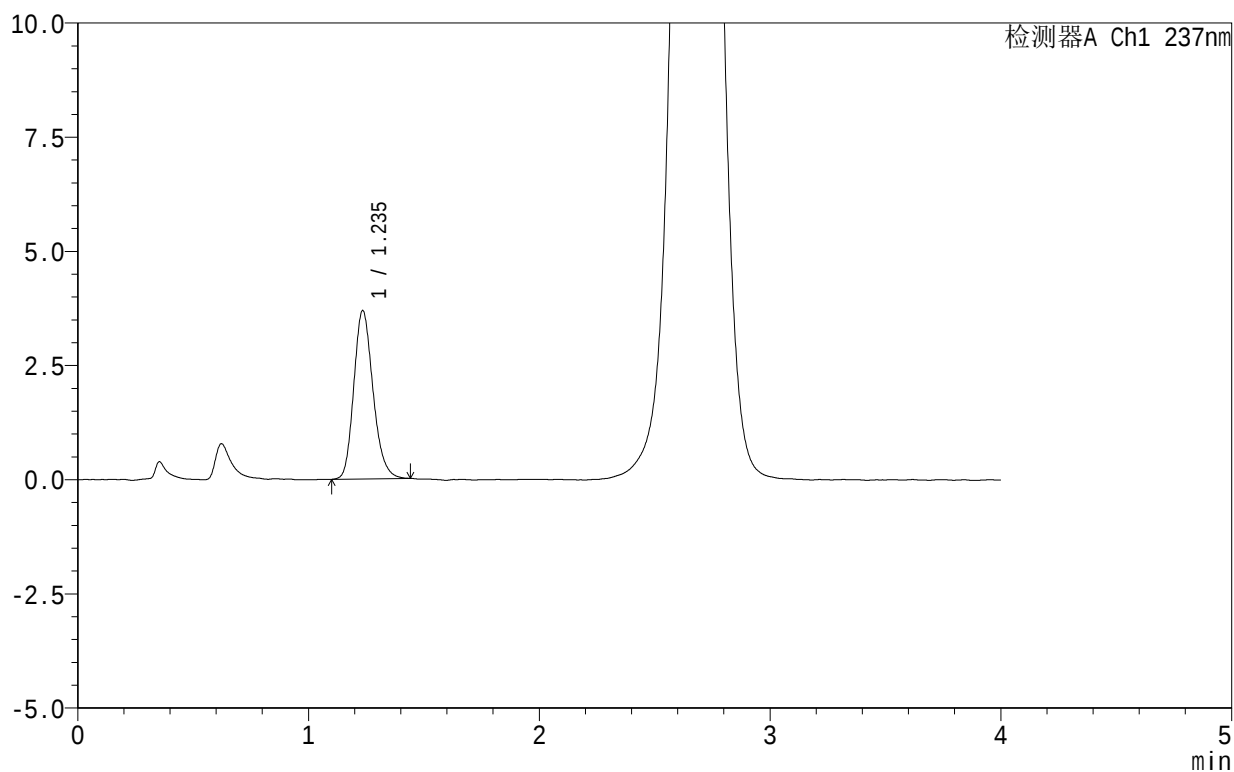

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	21343	100.000	3674	1075	1.196	--
总计		21343	100.000	3674			


图136 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-368-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:48:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

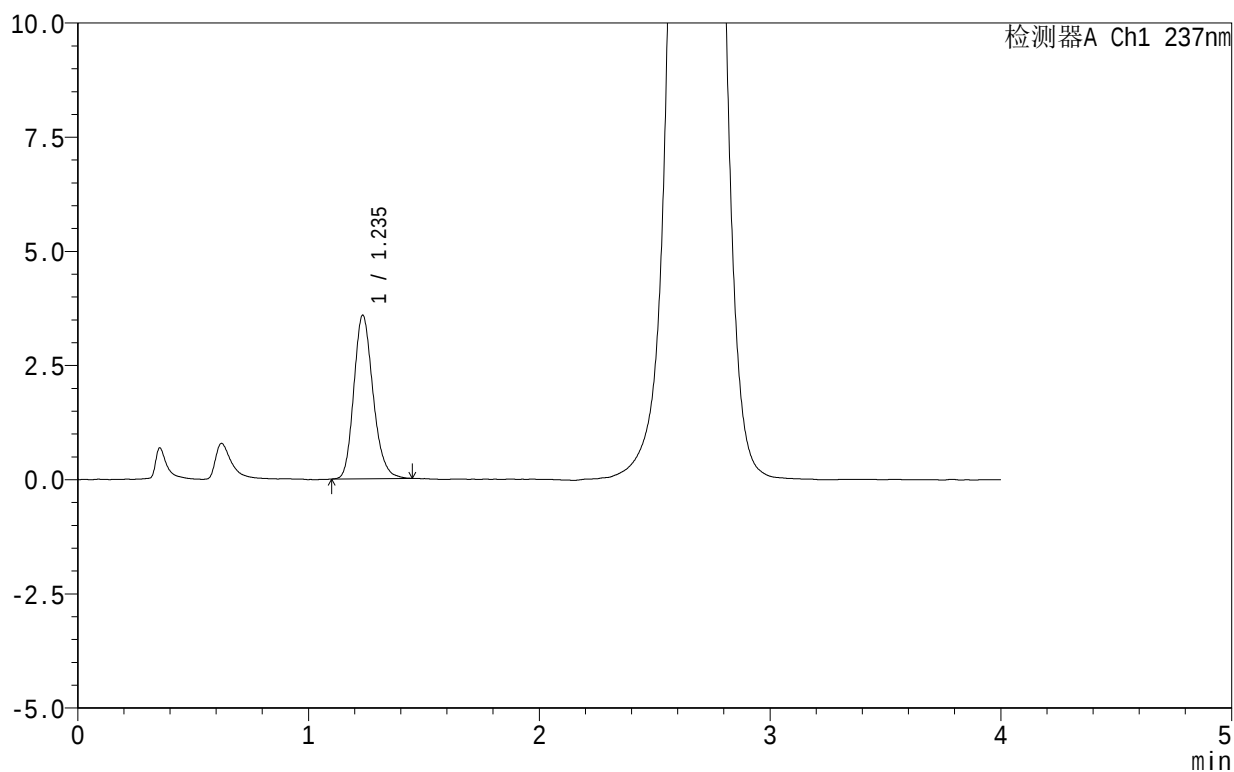

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	20735	100.000	3569	1077	1.198	--
总计		20735	100.000	3569			


图137 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-369-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:53:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

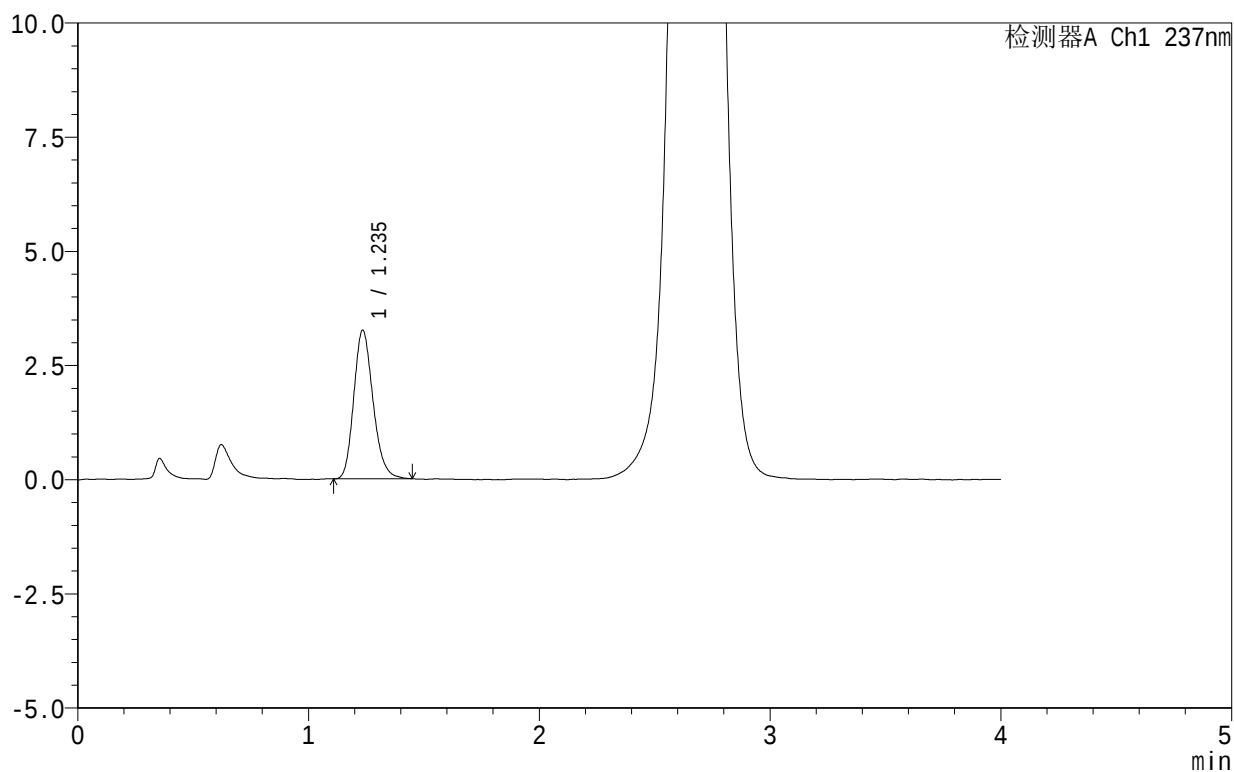

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	18846	100.000	3240	1066	1.200	--
总计		18846	100.000	3240			


图138 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-370-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:57:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

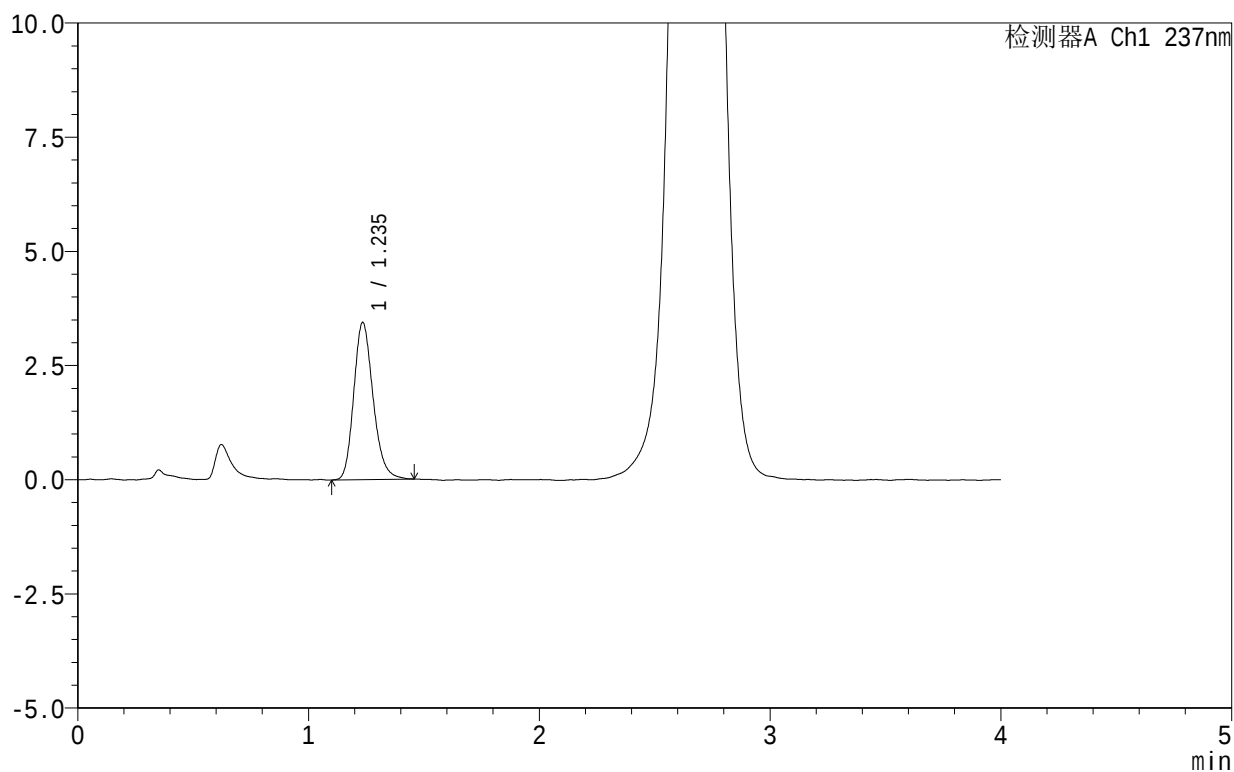

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	20006	100.000	3428	1070	1.202	--
总计		20006	100.000	3428			


图139 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-371-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:01:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

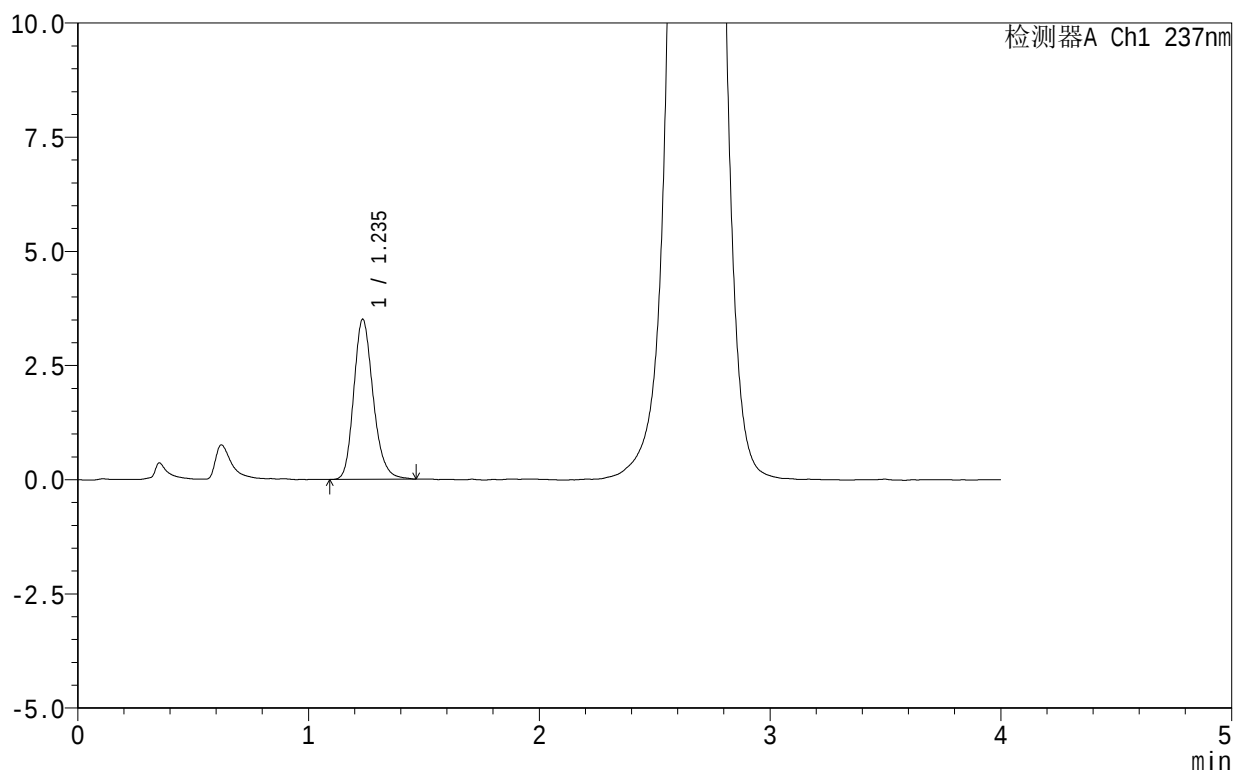

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	20441	100.000	3490	1070	1.208	--
总计		20441	100.000	3490			


图140 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-372-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:06:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

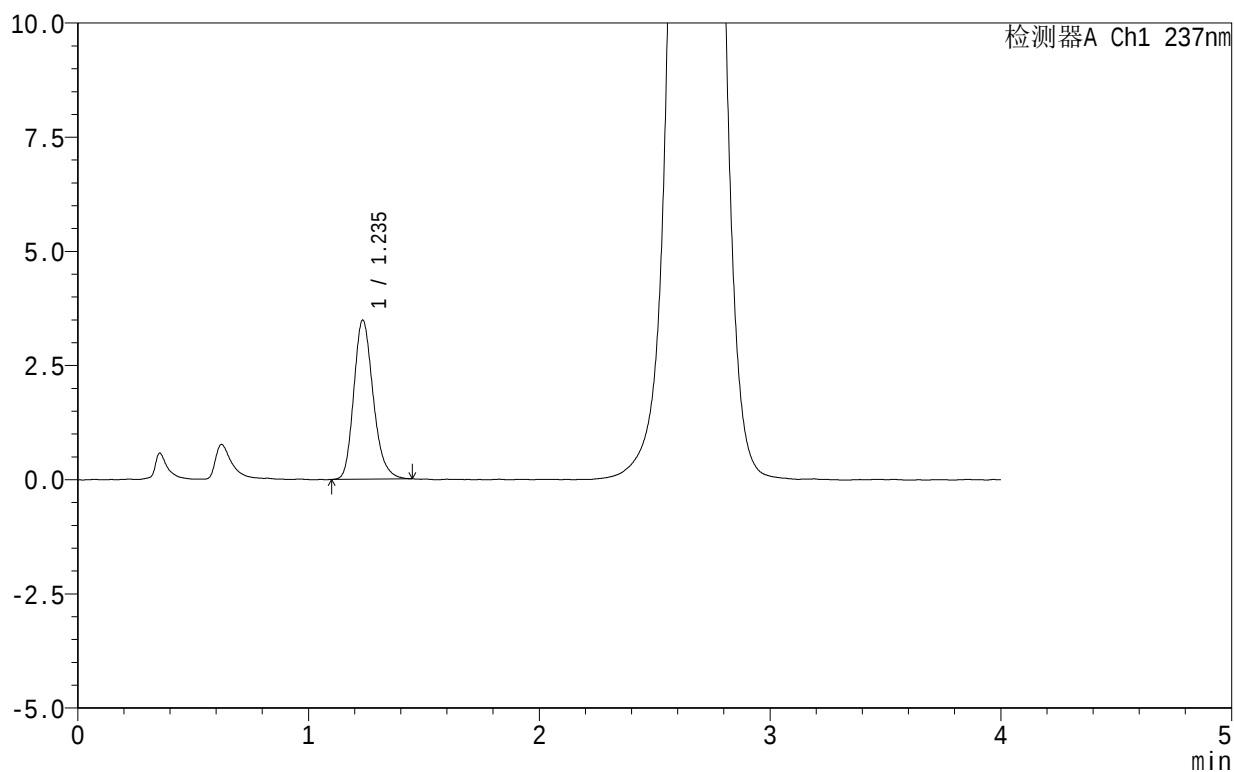

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	20346	100.000	3473	1066	1.219	--
总计		20346	100.000	3473			


图141 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-373-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:10:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

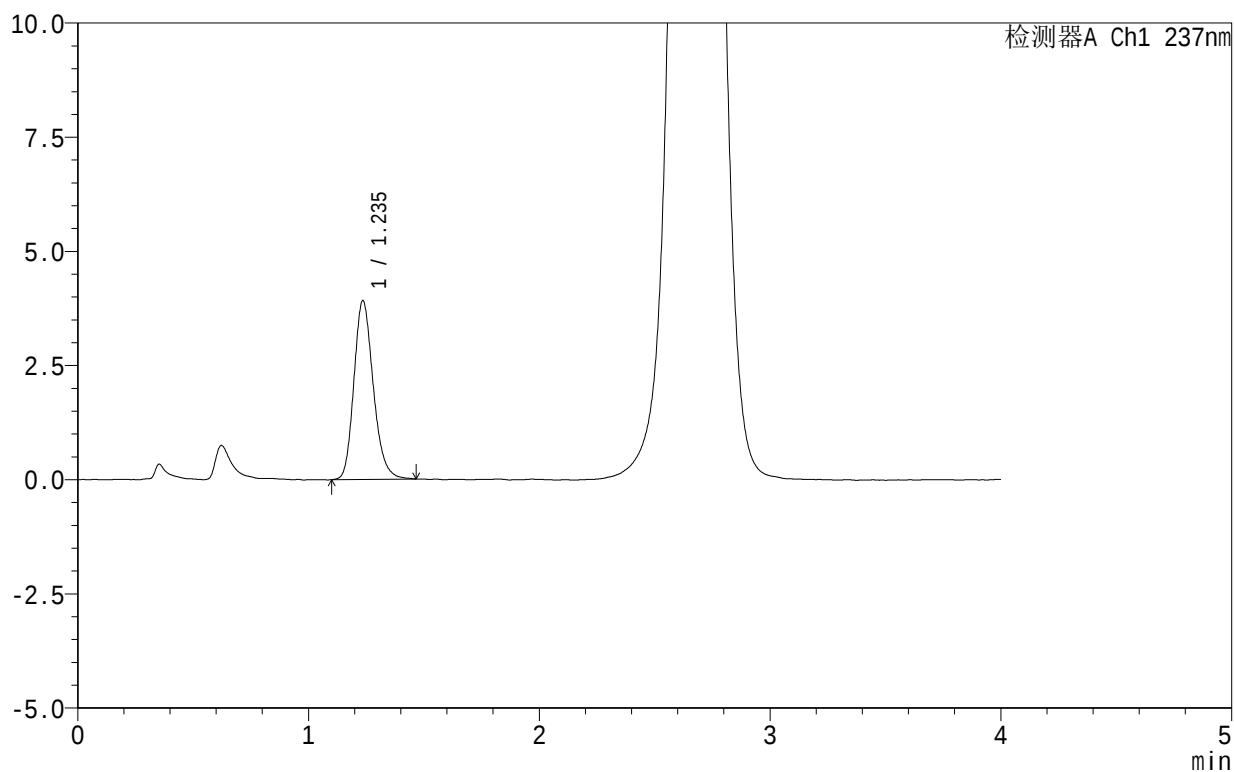

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	22872	100.000	3906	1064	1.206	--
总计		22872	100.000	3906			


图142 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-374-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:15:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

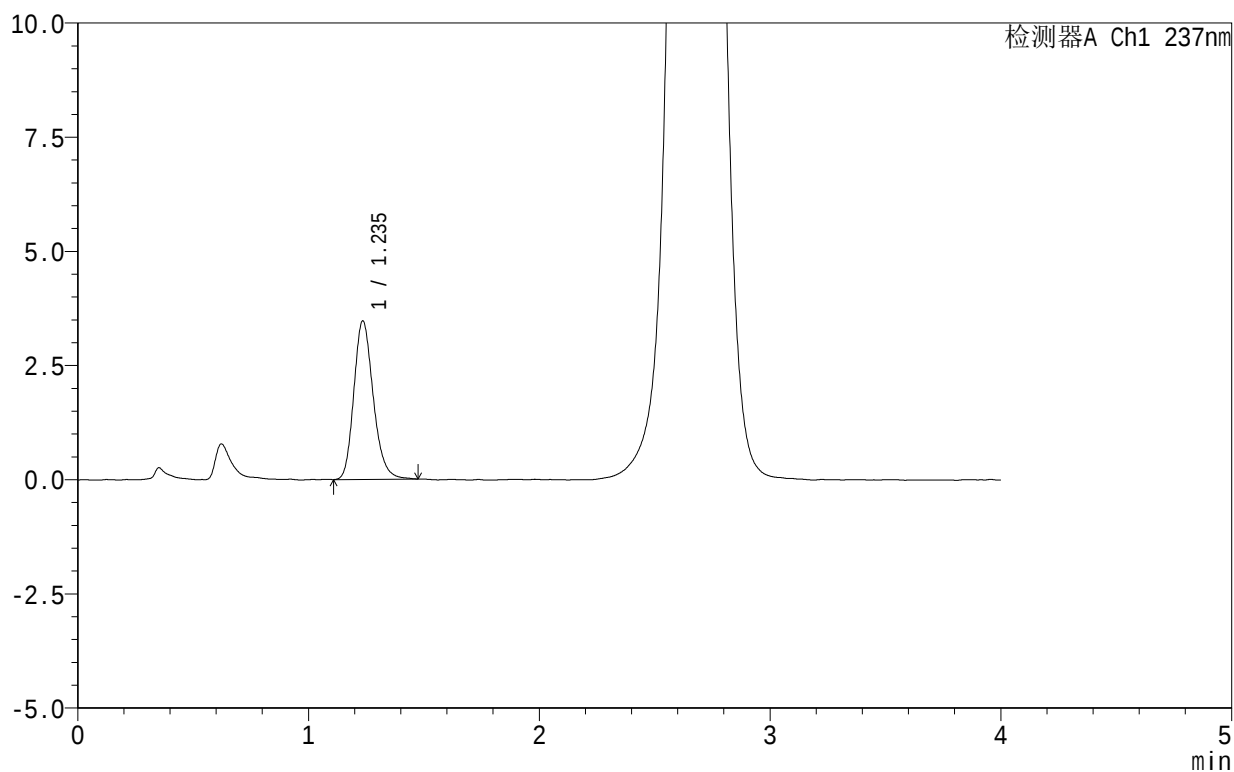

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	20281	100.000	3460	1064	1.205	--
总计		20281	100.000	3460			

图143 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-375-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 02:19:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:45:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

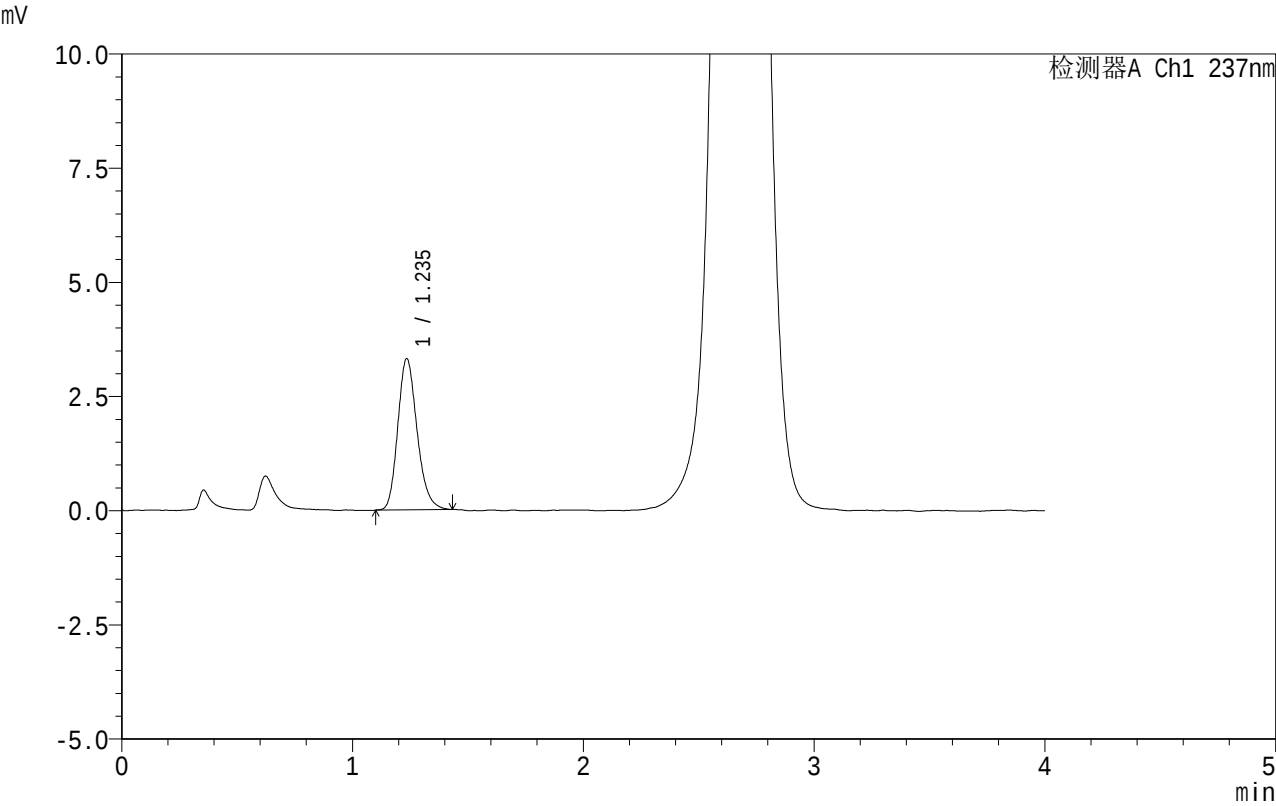

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	19218	100.000	3300	1074	1.204	--
总计		19218	100.000	3300			


图144 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-376-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:23:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

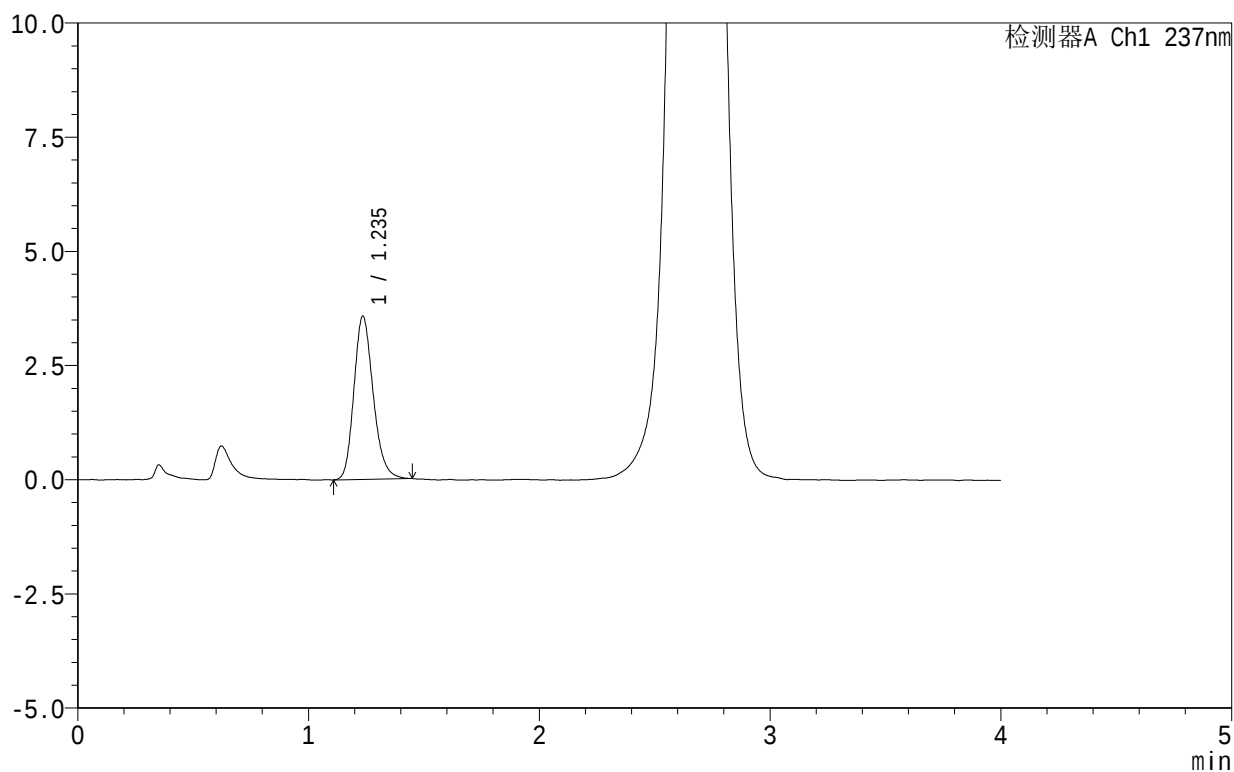

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	20731	100.000	3565	1069	1.204	--
总计		20731	100.000	3565			


图145 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-377-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:28:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:45:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

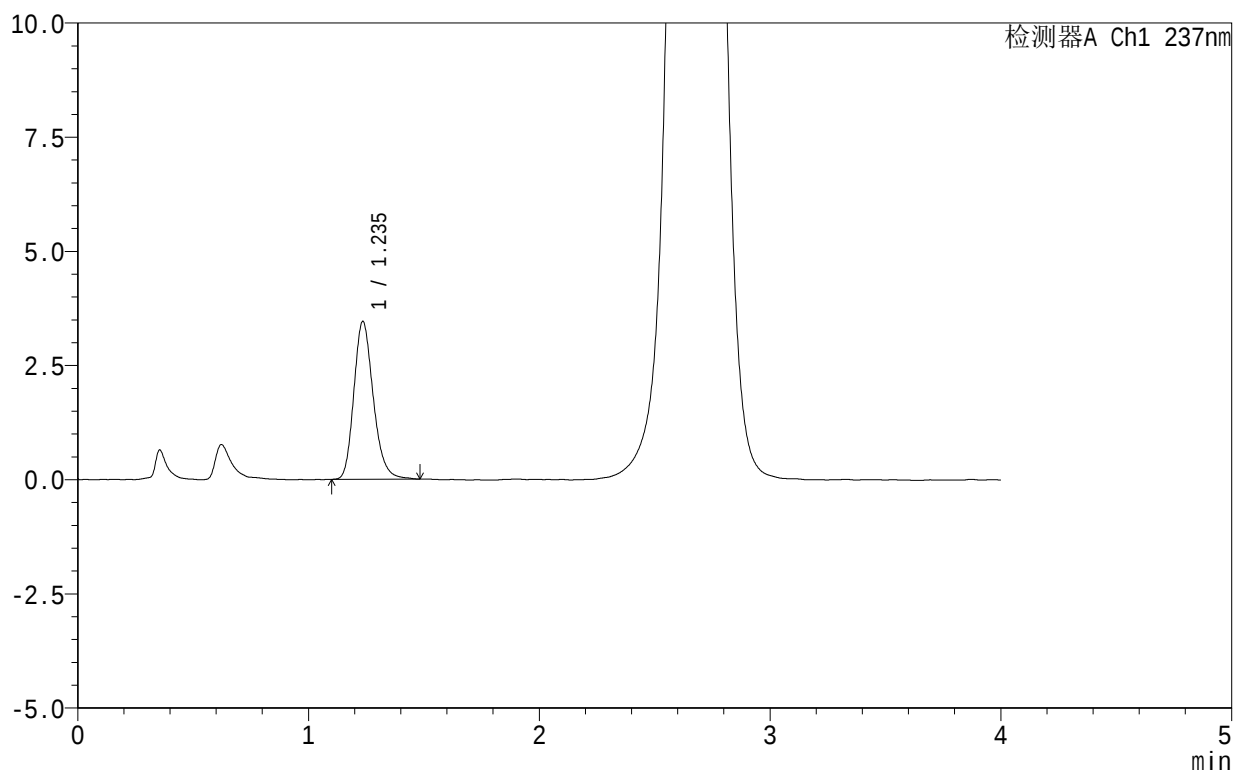

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	20218	100.000	3446	1060	1.214	--
总计		20218	100.000	3446			


图146 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-378-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:32:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:46:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

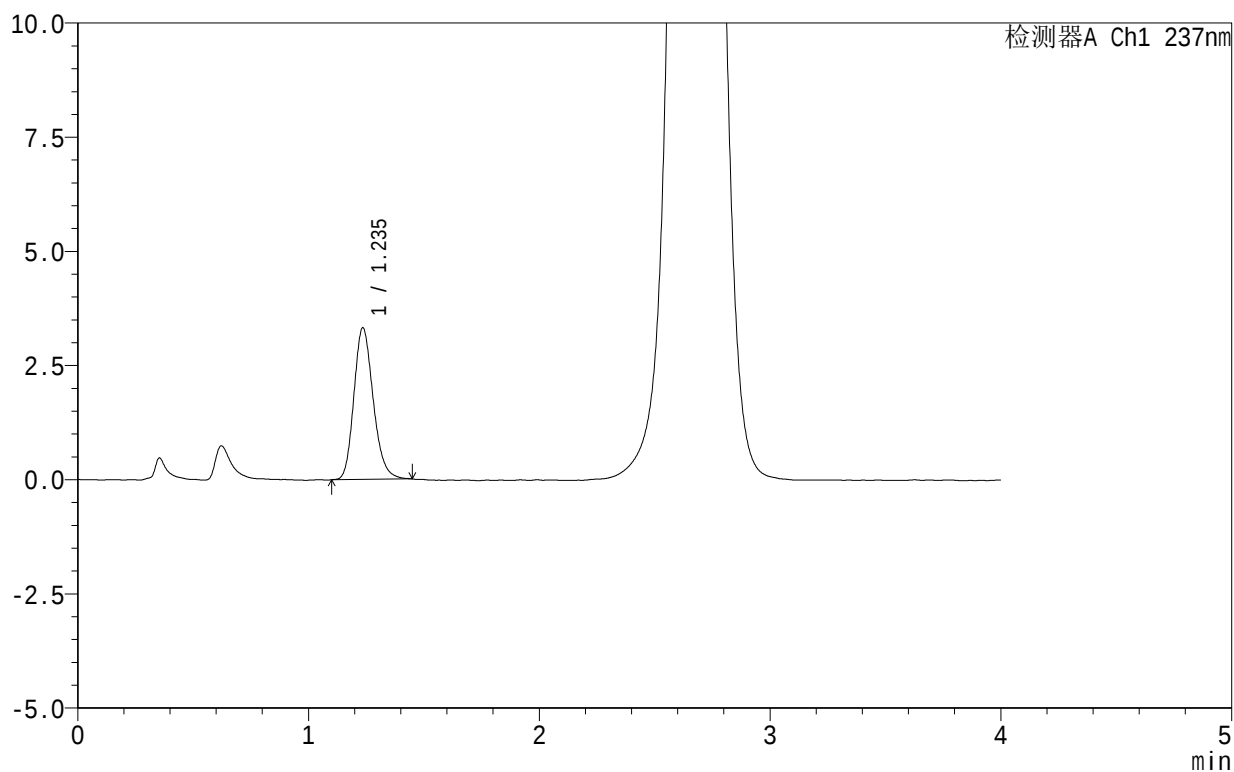

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	19344	100.000	3313	1064	1.198	--
总计		19344	100.000	3313			


图147 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-379-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:36:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:46:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

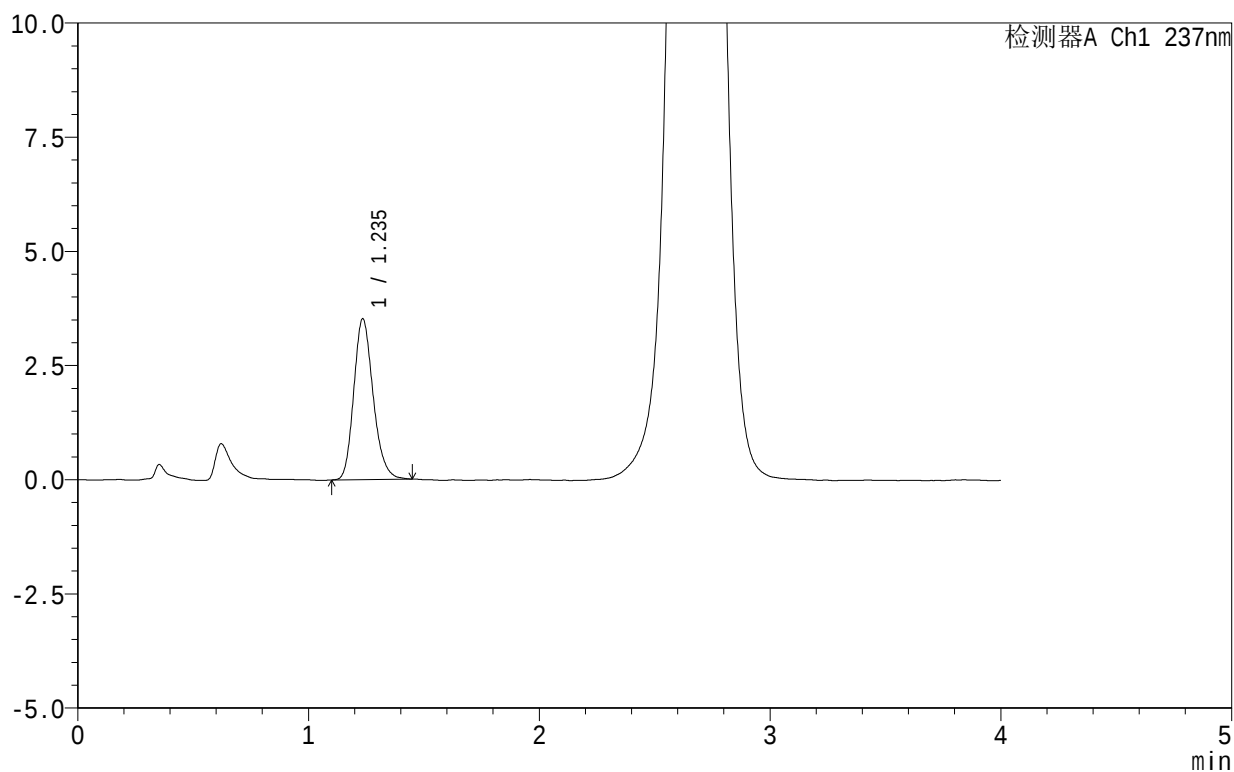

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	20540	100.000	3510	1057	1.202	--
总计		20540	100.000	3510			


图148 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-380-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:41:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:46:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

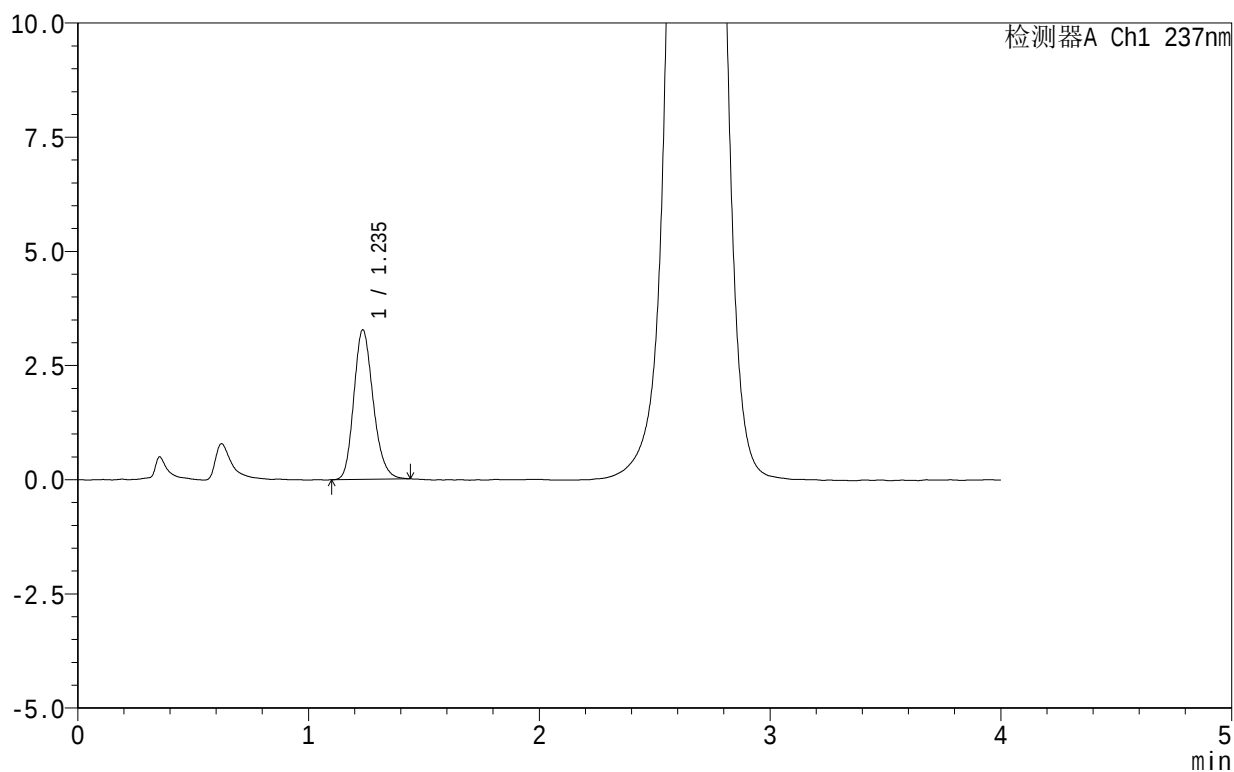

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	19079	100.000	3265	1058	1.198	--
总计		19079	100.000	3265			

图149 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-381-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 02:45:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:46:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

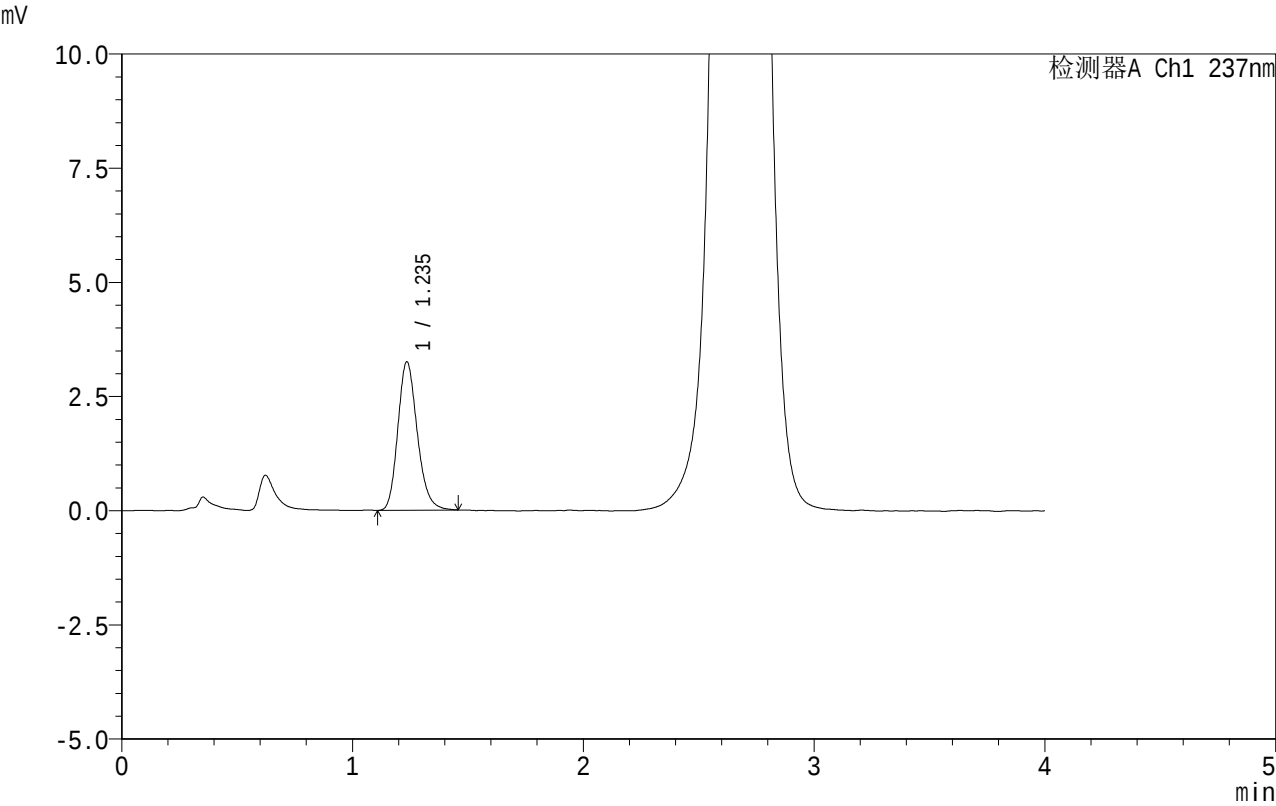

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	19029	100.000	3242	1056	1.197	--
总计		19029	100.000	3242			


图150 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-382-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:49:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:46:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

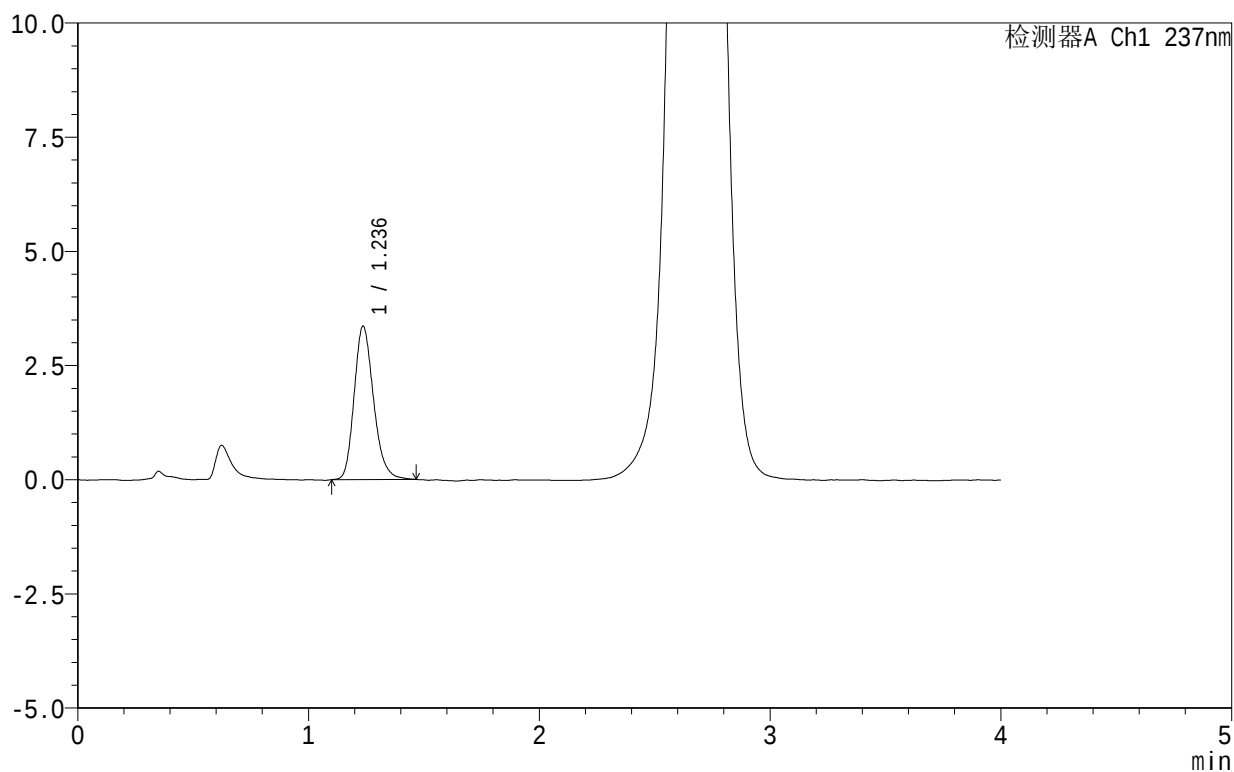

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	19608	100.000	3357	1060	1.216	--
总计		19608	100.000	3357			


图151 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-383-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:54:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:46:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

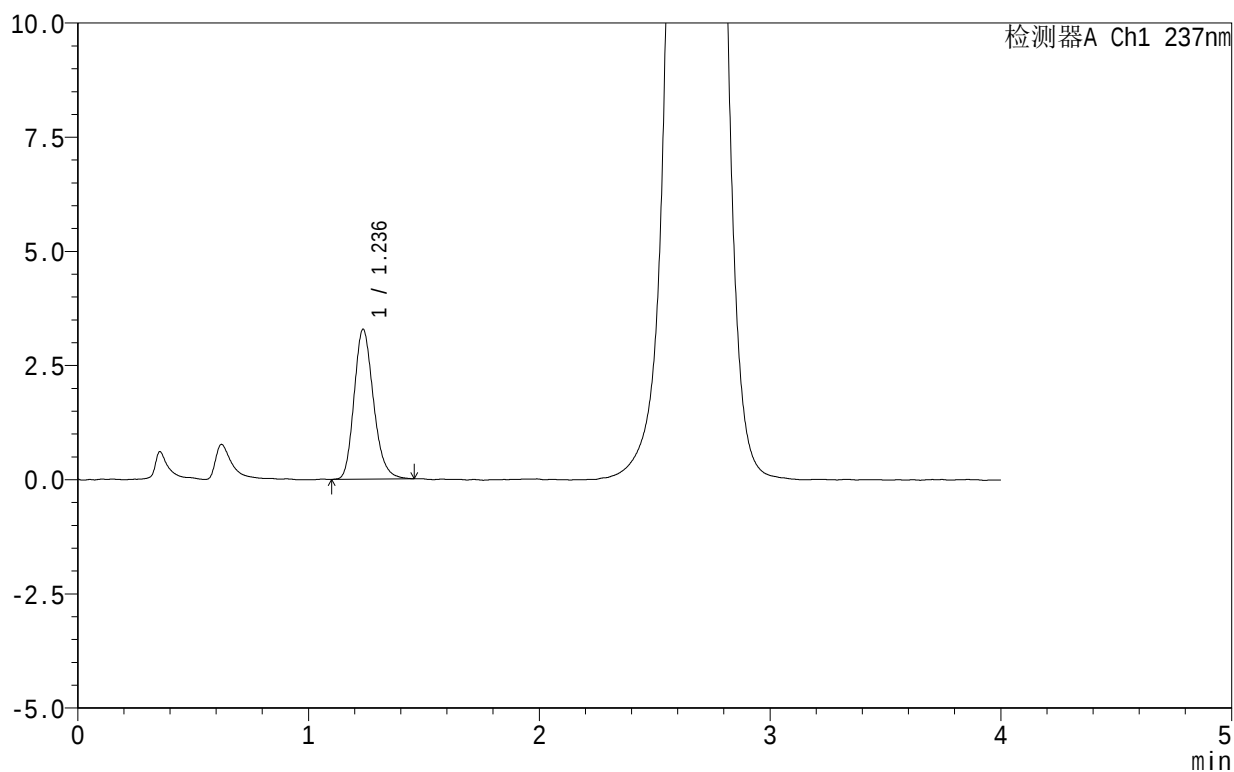

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	19169	100.000	3280	1054	1.208	--
总计		19169	100.000	3280			

图152 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-384-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 02:58:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:46:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

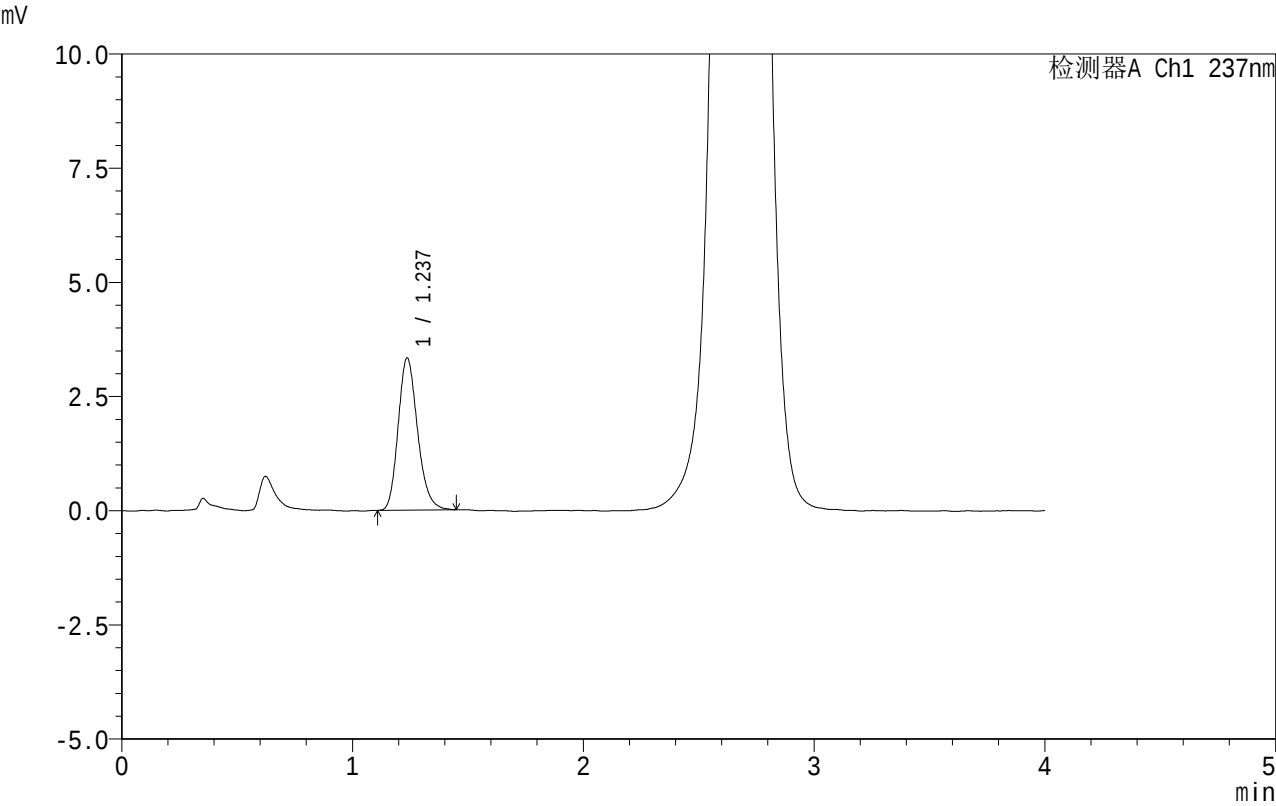

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	19487	100.000	3332	1063	1.200	--
总计		19487	100.000	3332			


图153 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-385-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:03:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:46:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

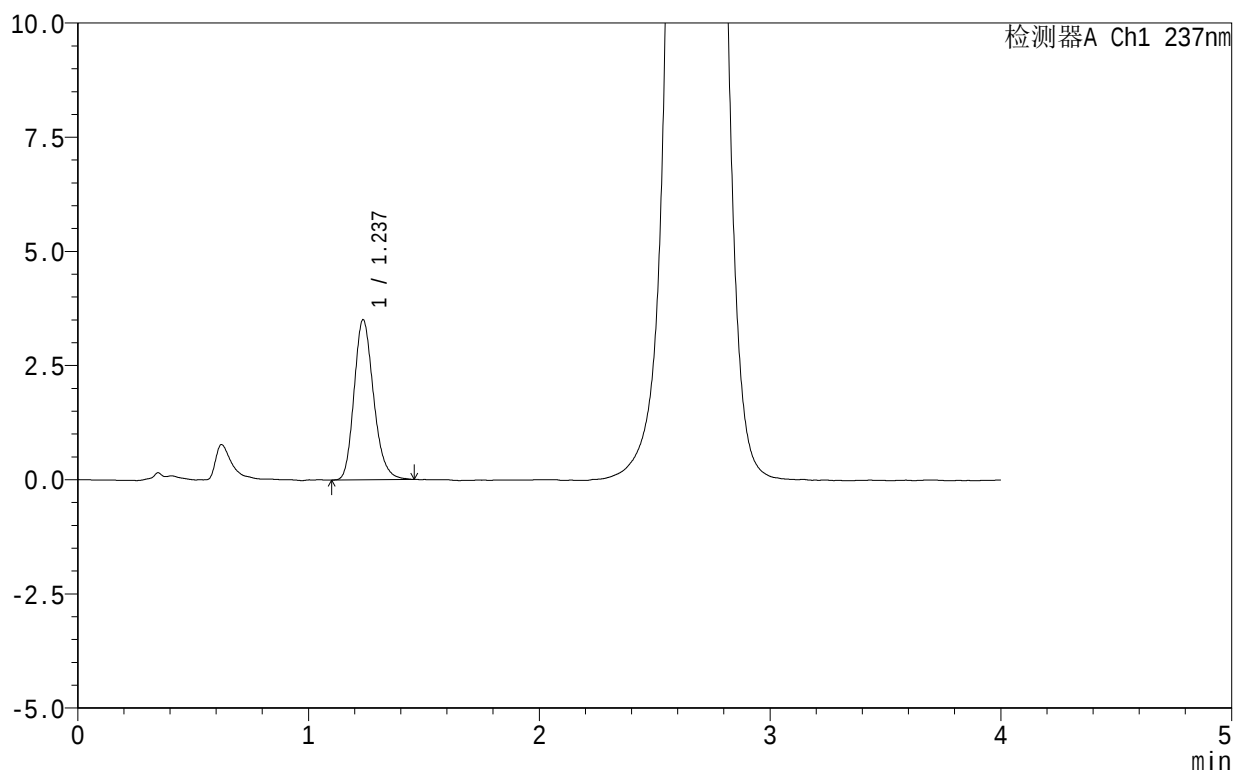

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	20511	100.000	3501	1052	1.211	--
总计		20511	100.000	3501			


图154 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-386-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:07:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:46:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

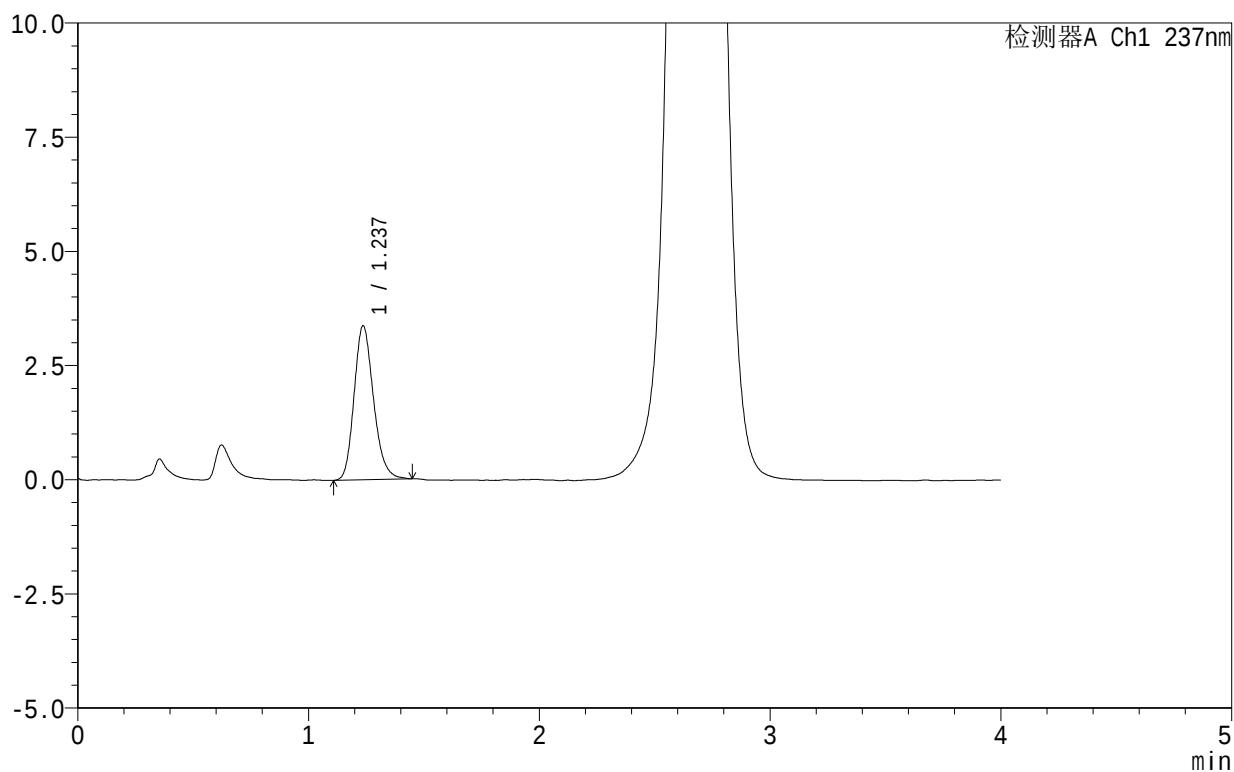

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	19728	100.000	3370	1053	1.197	--
总计		19728	100.000	3370			


图155 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-387-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:11:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:46:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

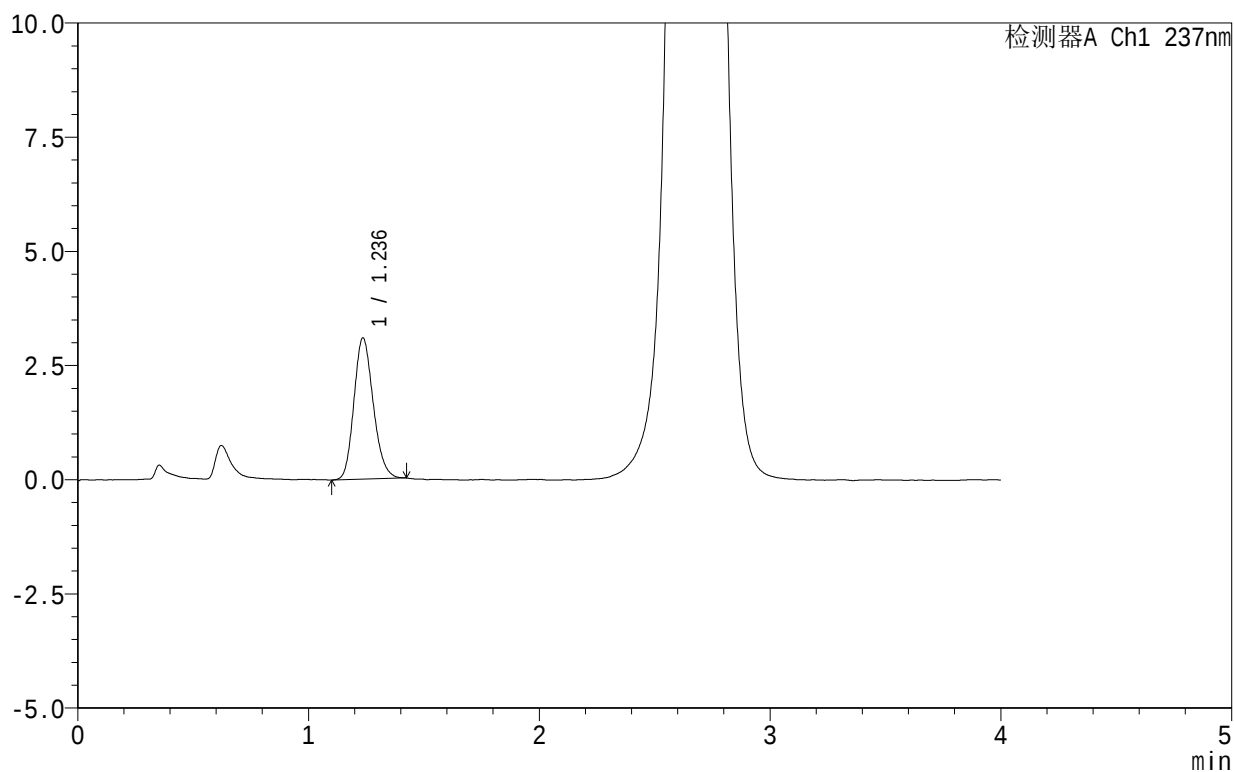

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	18002	100.000	3088	1048	1.178	--
总计		18002	100.000	3088			


图156 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-388-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:16:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:46:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

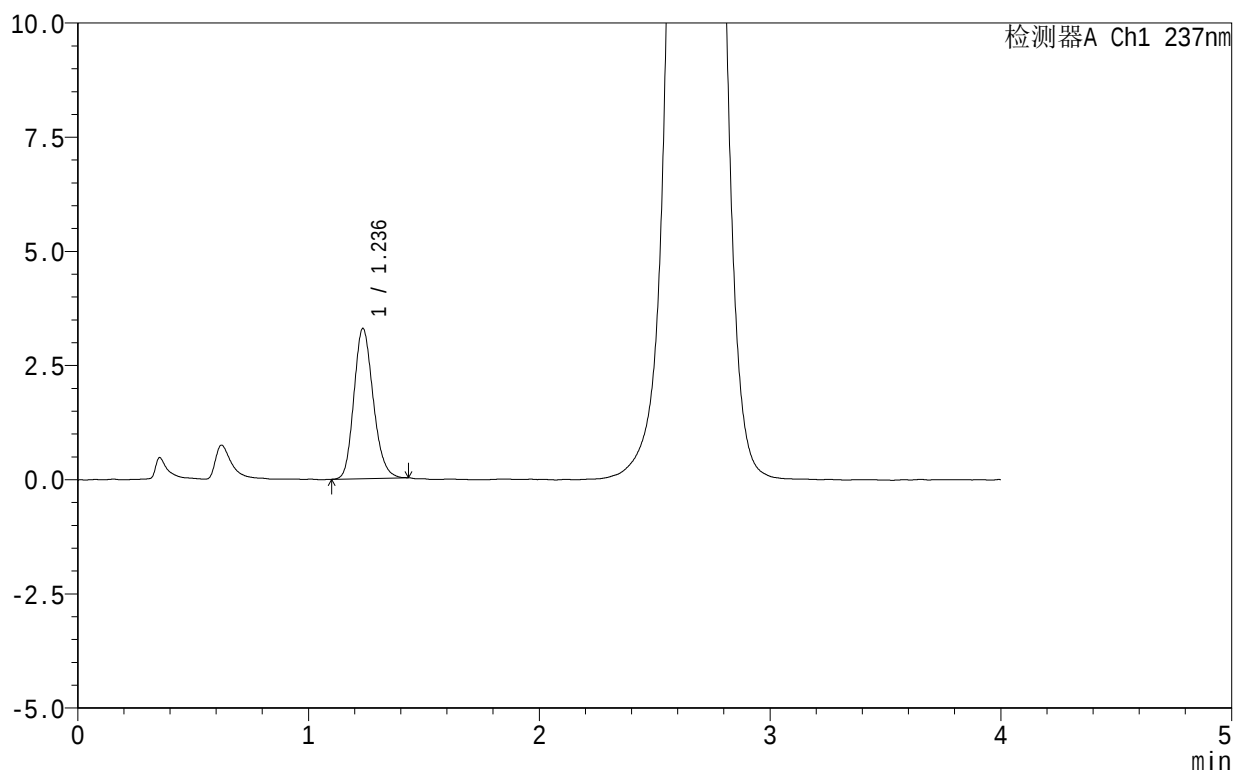

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	19100	100.000	3282	1054	1.182	--
总计		19100	100.000	3282			


图157 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-389-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:20:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:46:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

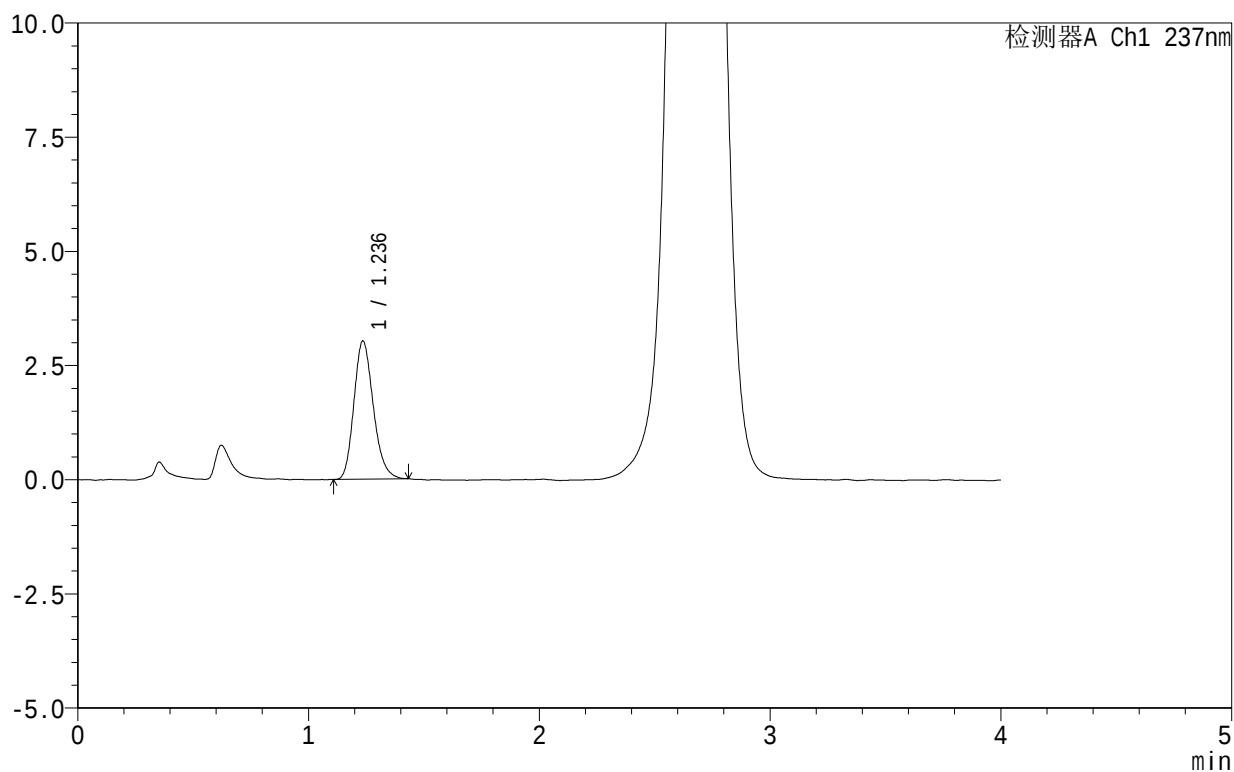

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	17660	100.000	3020	1049	1.203	--
总计		17660	100.000	3020			


图158 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-390-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:24:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:46:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

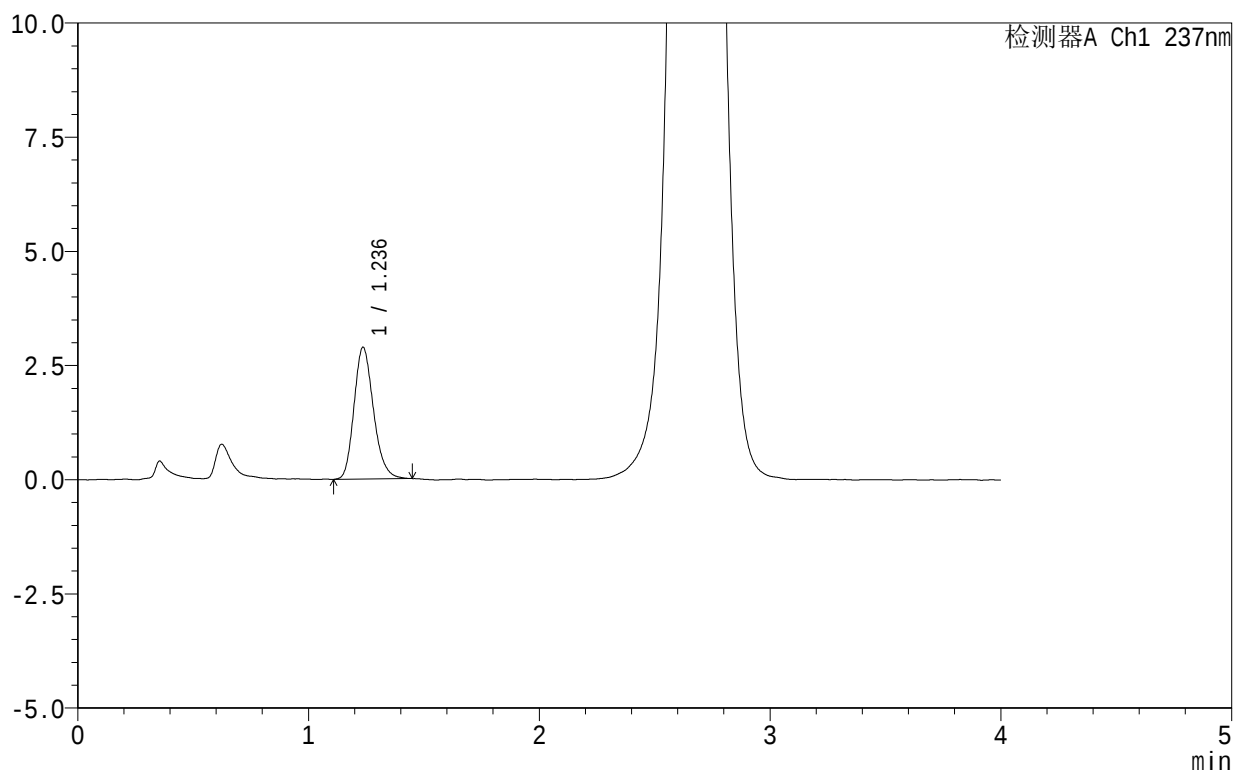

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	16923	100.000	2883	1049	1.205	--
总计		16923	100.000	2883			


图159 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-391-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:29:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:46:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

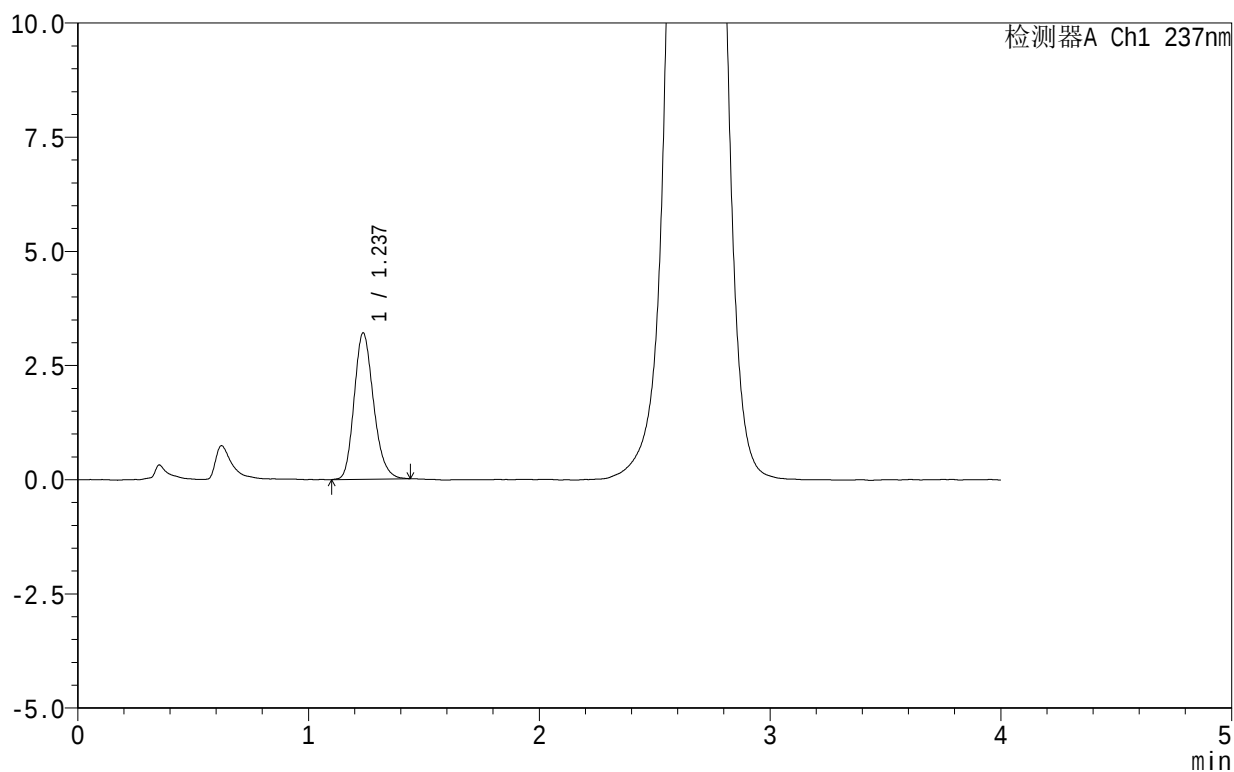

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	18711	100.000	3202	1056	1.201	--
总计		18711	100.000	3202			


图160 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-392-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:33:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:46:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

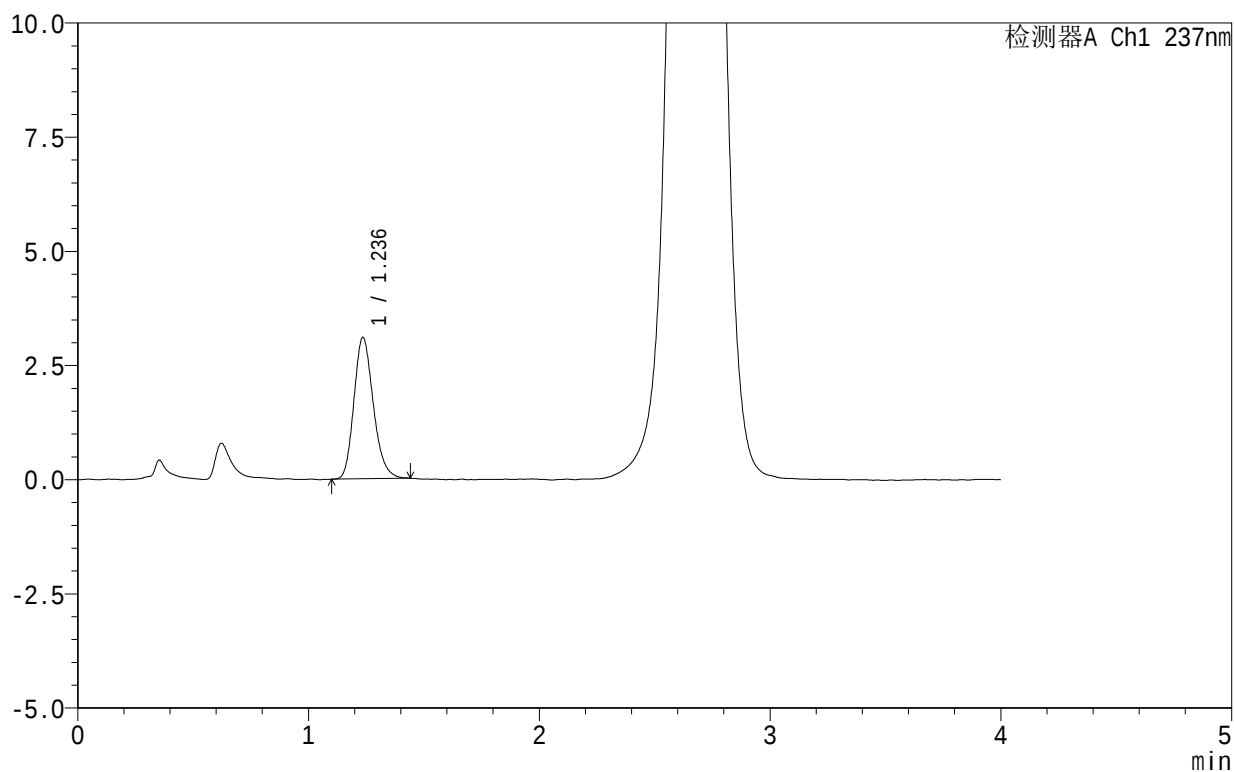

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	18085	100.000	3089	1049	1.205	--
总计		18085	100.000	3089			


图161 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-393-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:38:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:46:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

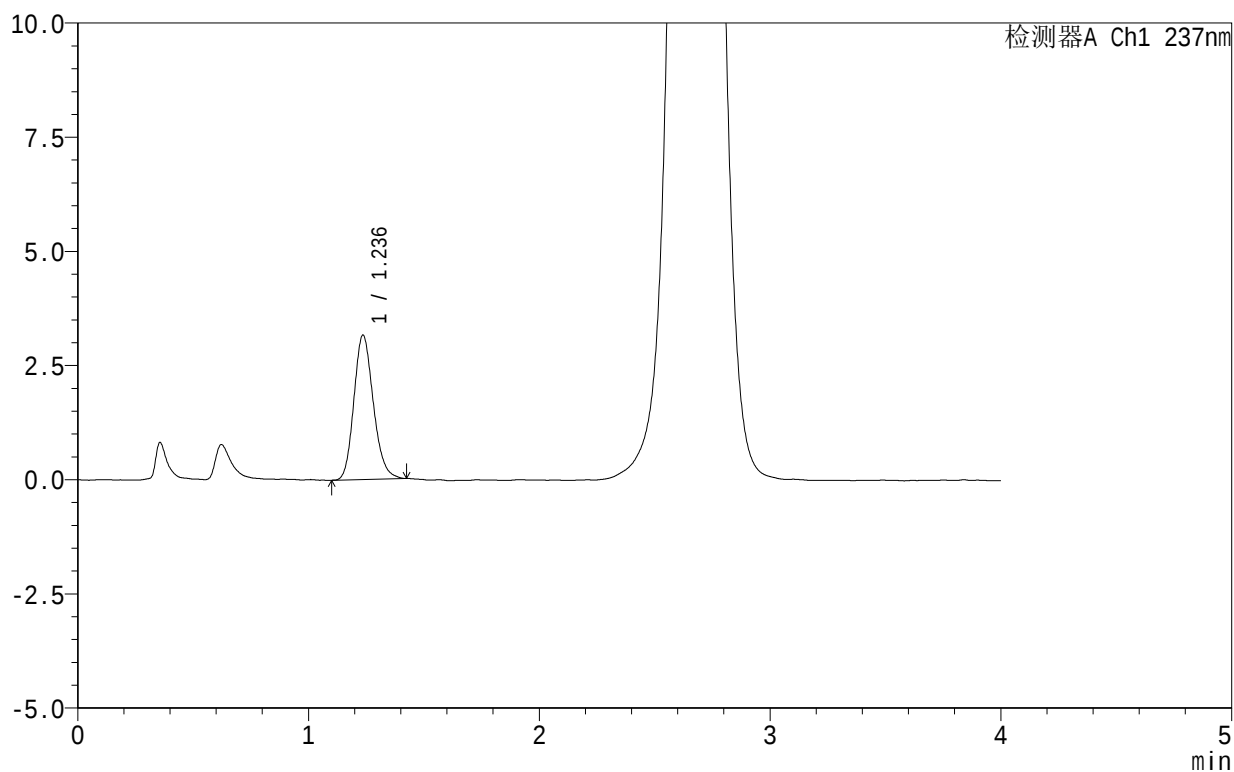

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	18475	100.000	3155	1046	1.175	--
总计		18475	100.000	3155			


图162 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-394-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:42:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:46:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

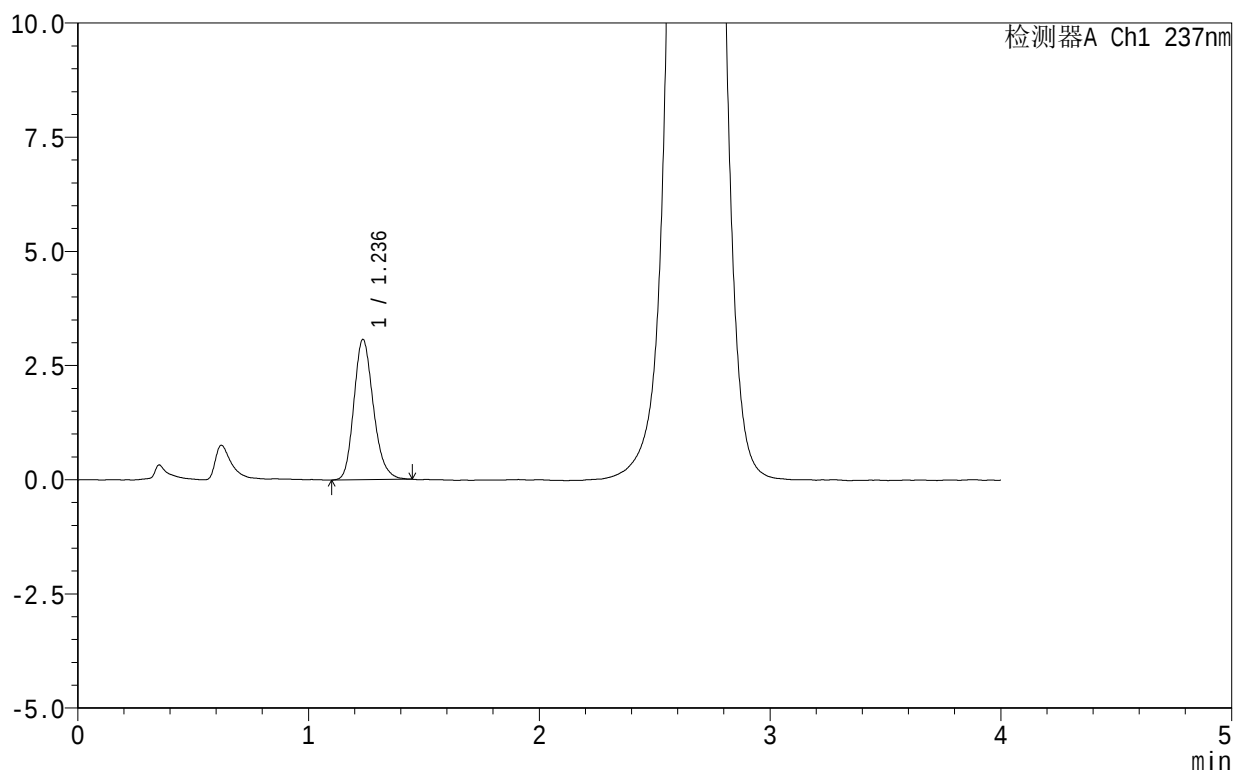

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	18014	100.000	3066	1051	1.207	--
总计		18014	100.000	3066			

图163 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-395-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 03:46:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:46:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

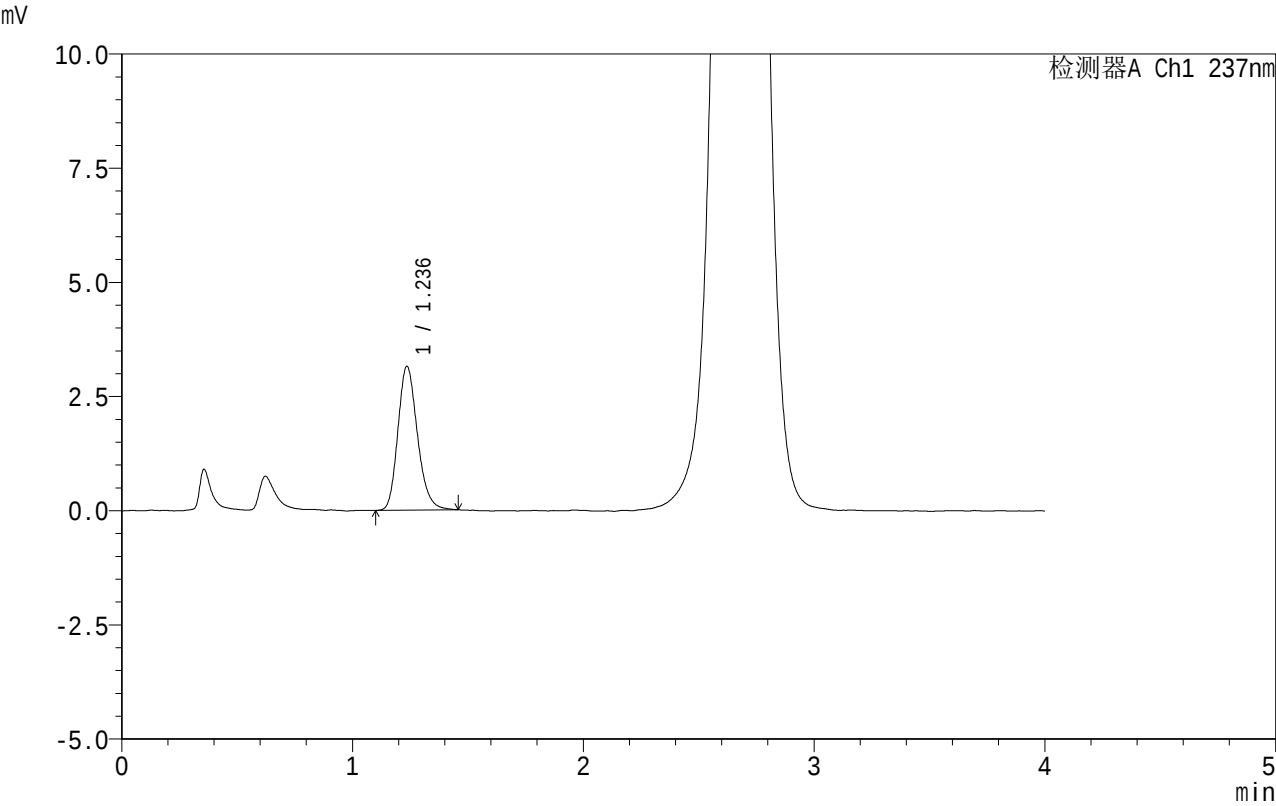

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	18561	100.000	3145	1041	1.205	--
总计		18561	100.000	3145			


图164 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-396-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:51:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:46:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

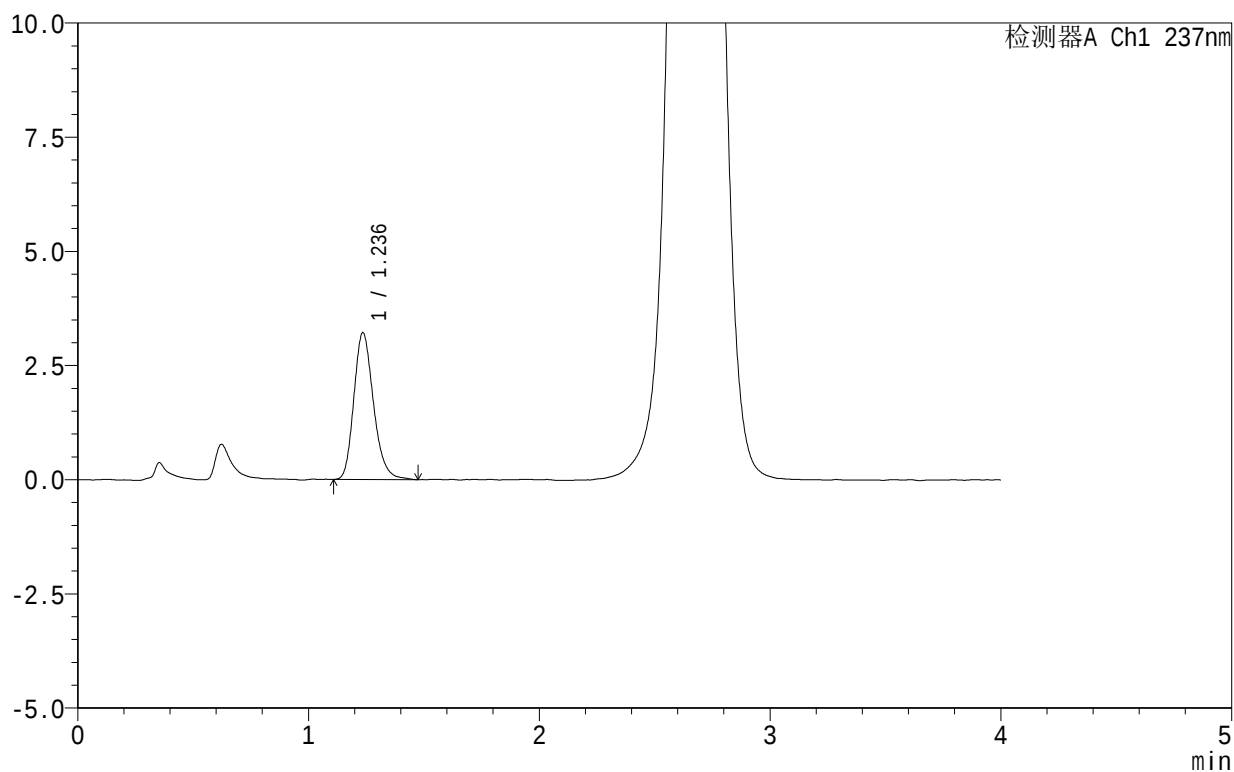

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	19033	100.000	3209	1033	1.220	--
总计		19033	100.000	3209			


图165 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-397-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:55:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:46:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

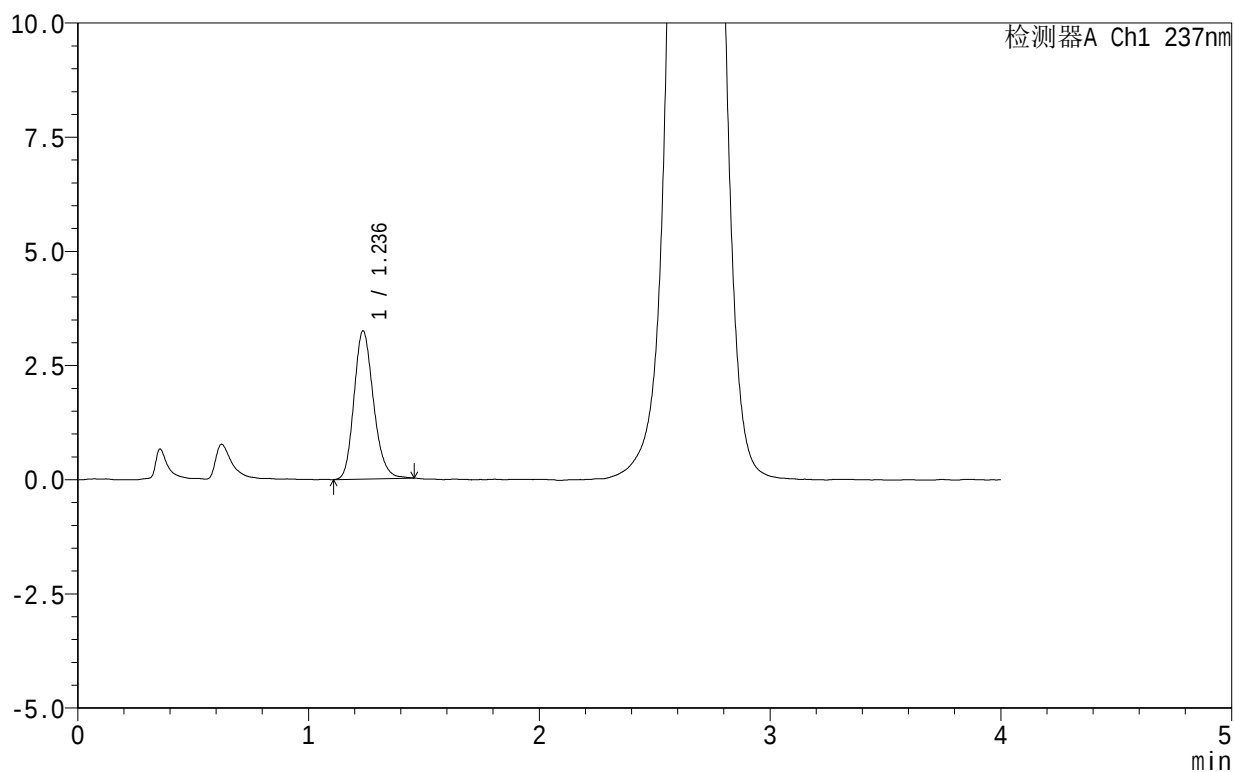

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	19001	100.000	3240	1048	1.191	--
总计		19001	100.000	3240			


图166 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-398-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:00:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:46:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

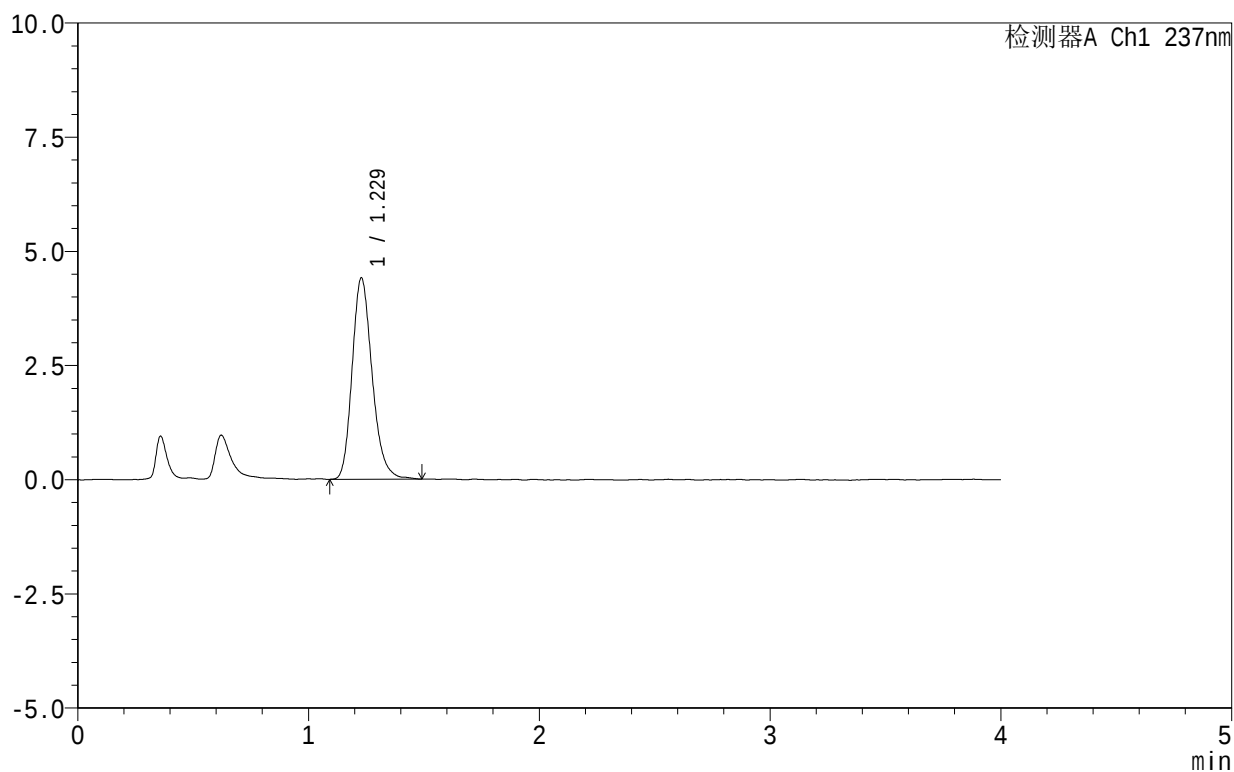

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	26542	100.000	4409	995	1.213	--
总计		26542	100.000	4409			


图167 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-399-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-1-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:04:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

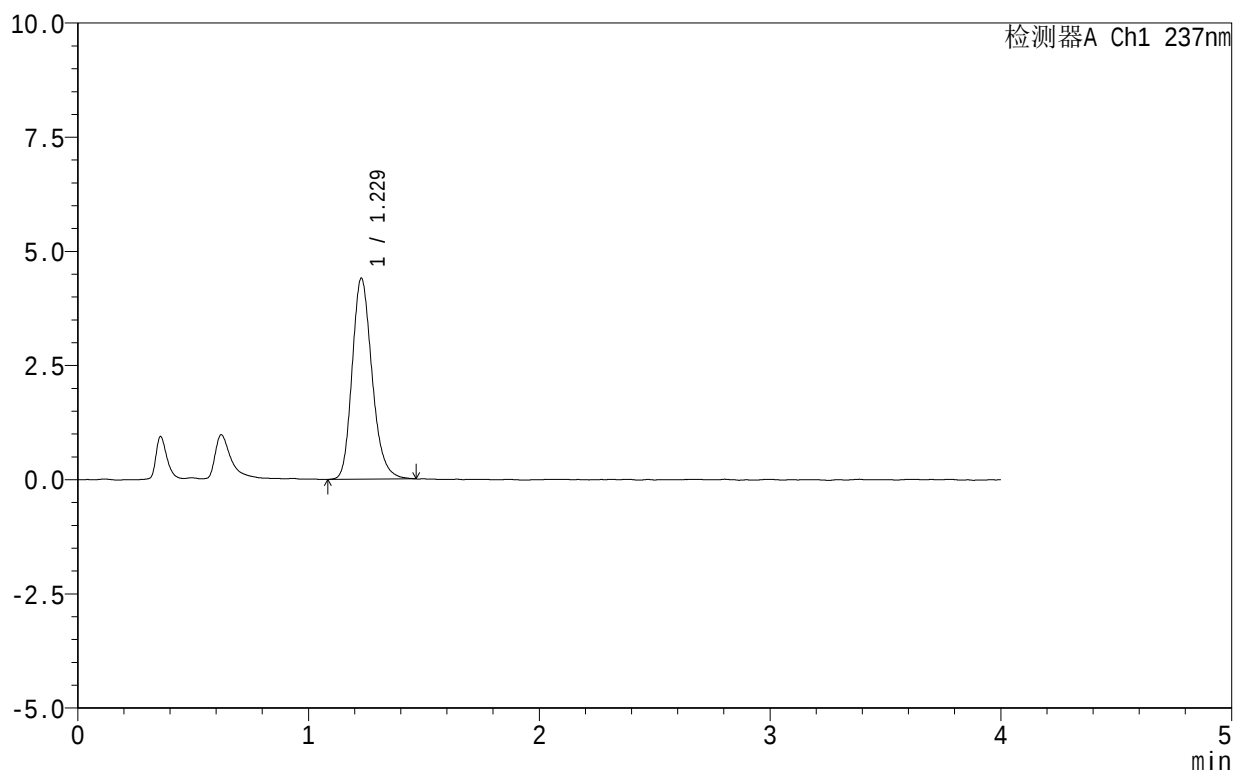

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	26339	100.000	4400	1000	1.213	--
总计		26339	100.000	4400			


图168 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-400-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:08:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

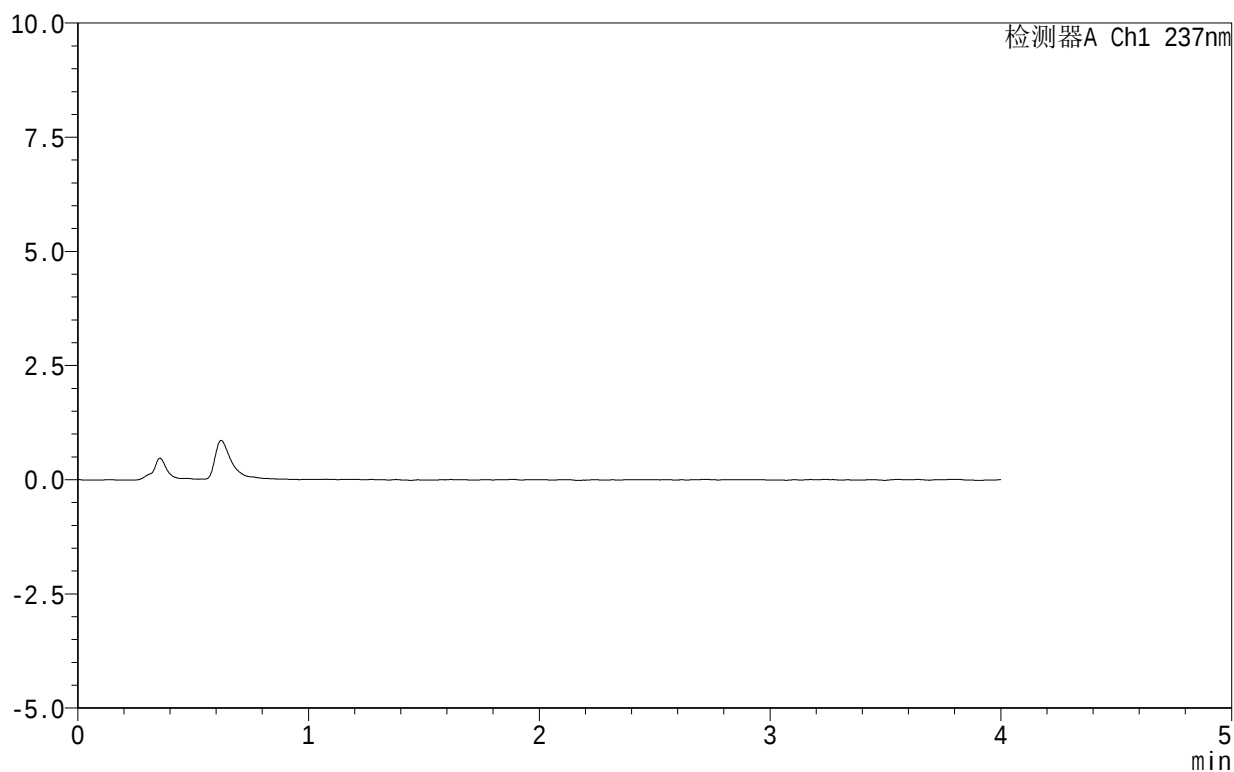

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图169 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-401-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:13:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

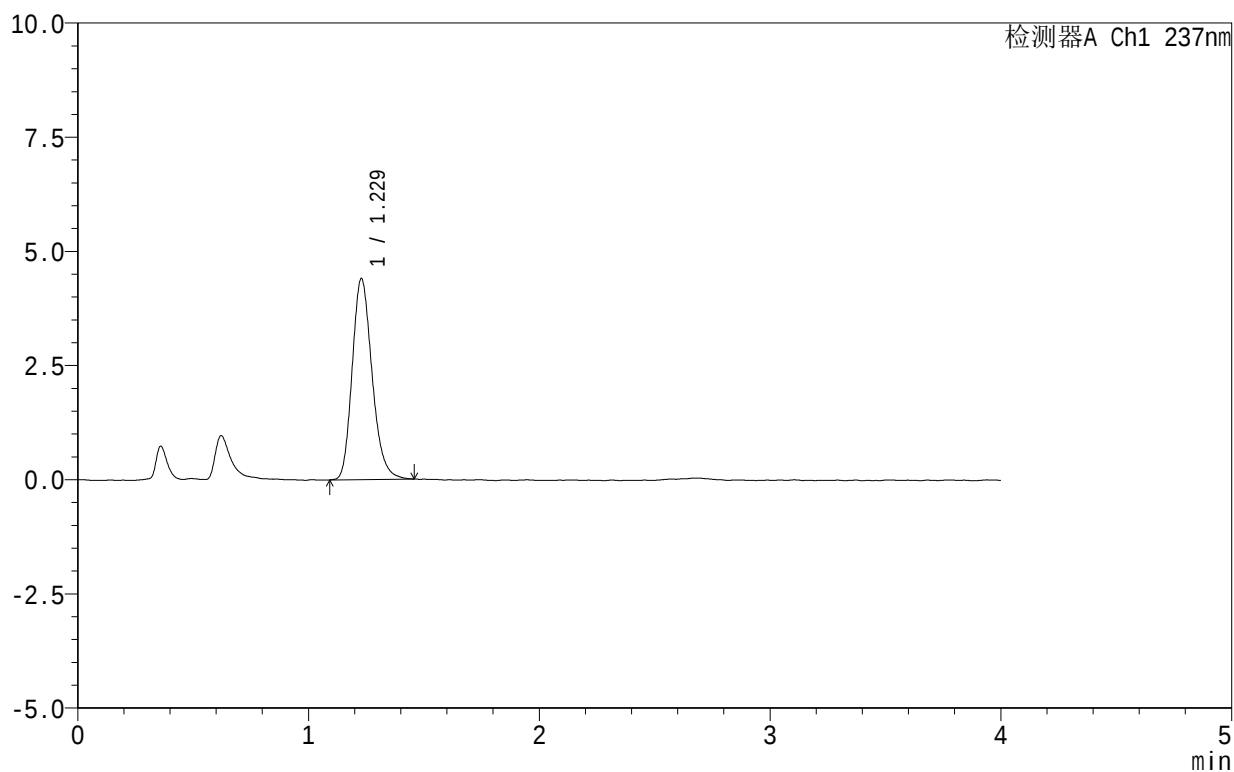

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	26322	100.000	4401	997	1.213	--
总计		26322	100.000	4401			


图170 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-402-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:17:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

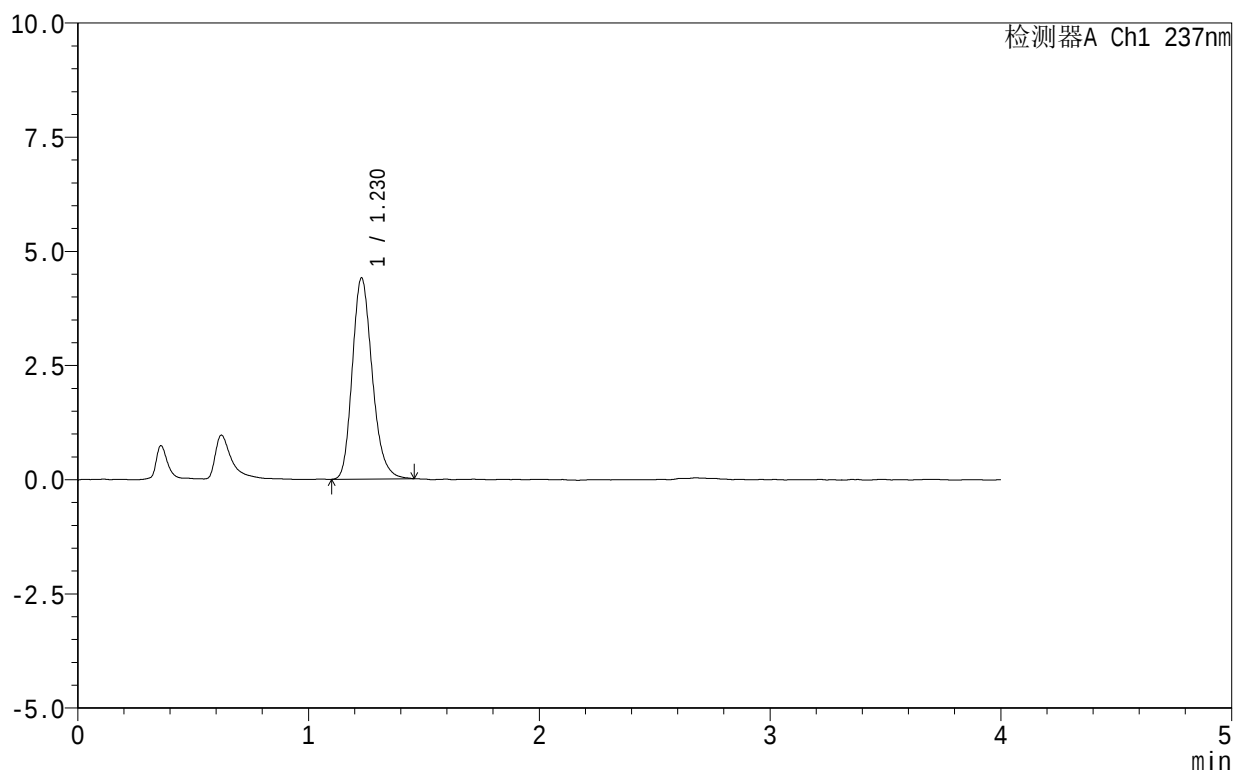

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	26390	100.000	4406	994	1.213	--
总计		26390	100.000	4406			


图171 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-403-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:22:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

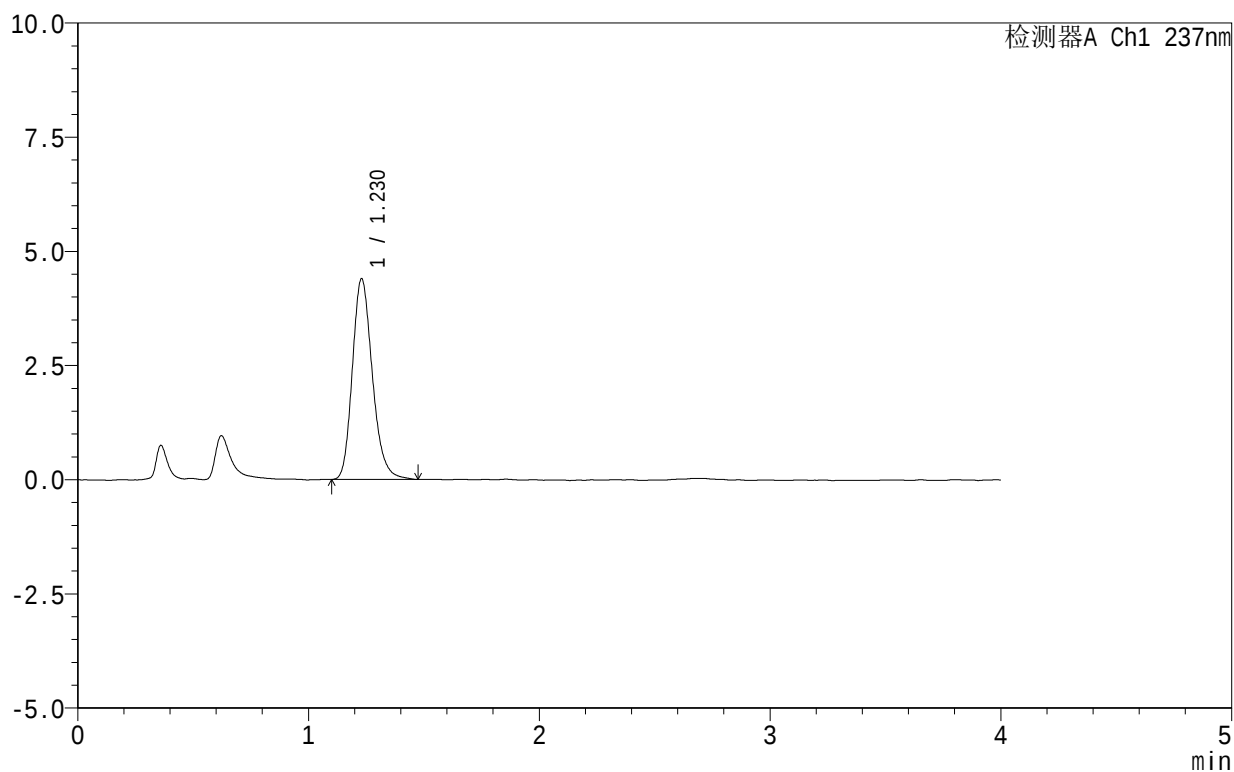

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	26460	100.000	4398	994	1.215	--
总计		26460	100.000	4398			


图172 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-404-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:26:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

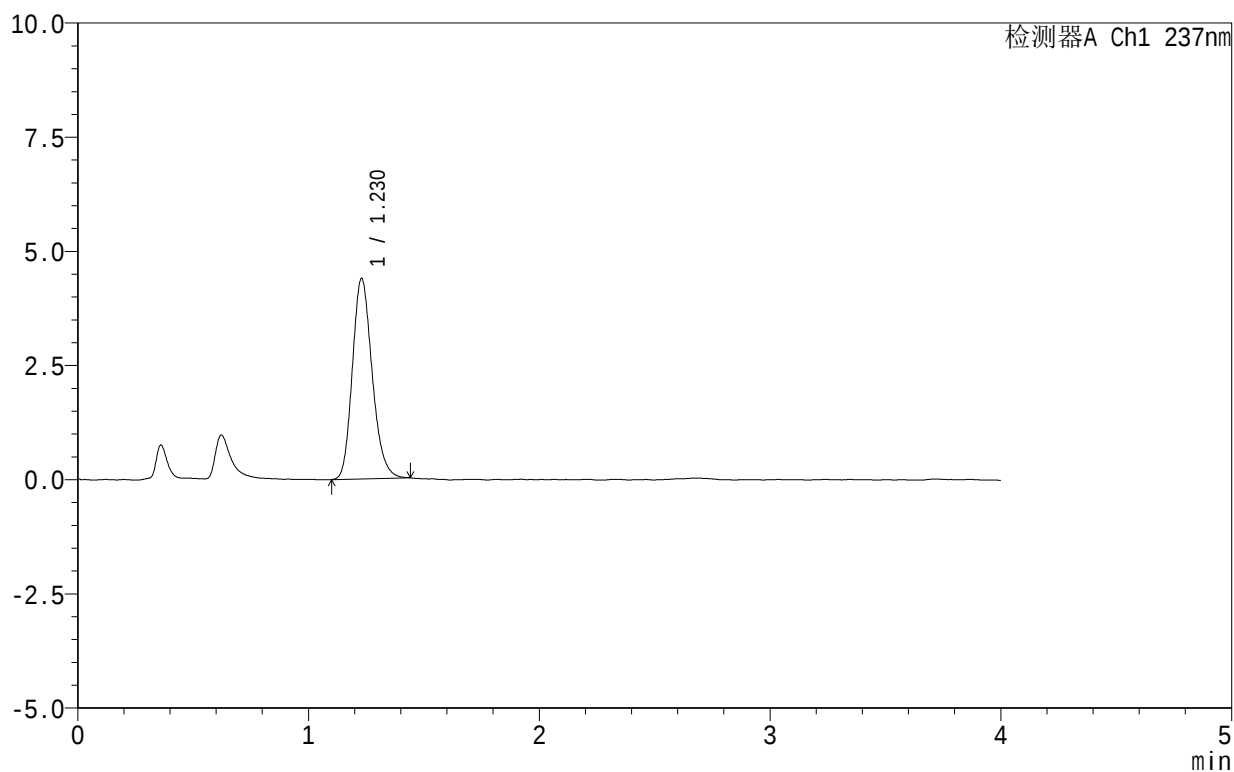

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	26121	100.000	4392	1003	1.196	--
总计		26121	100.000	4392			


图173 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-405-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:30:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

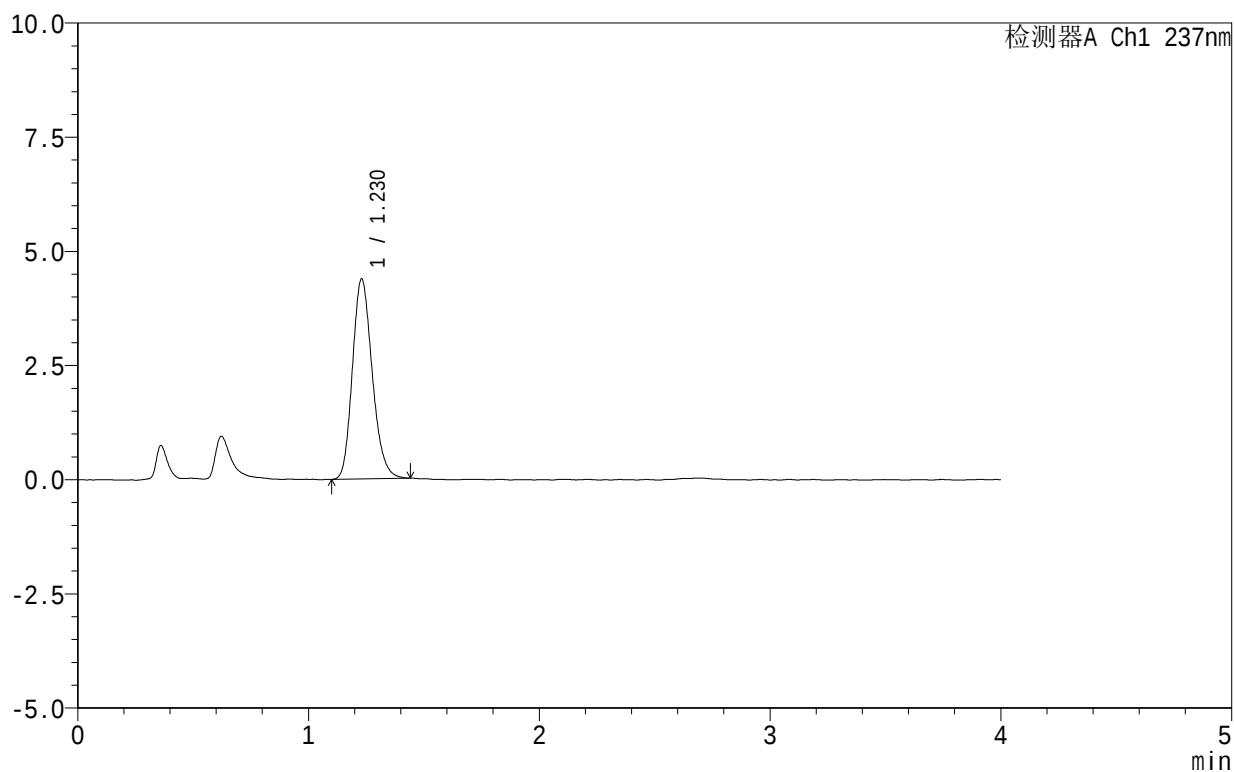

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	26109	100.000	4383	995	1.193	--
总计		26109	100.000	4383			

图174 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-406-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:35:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

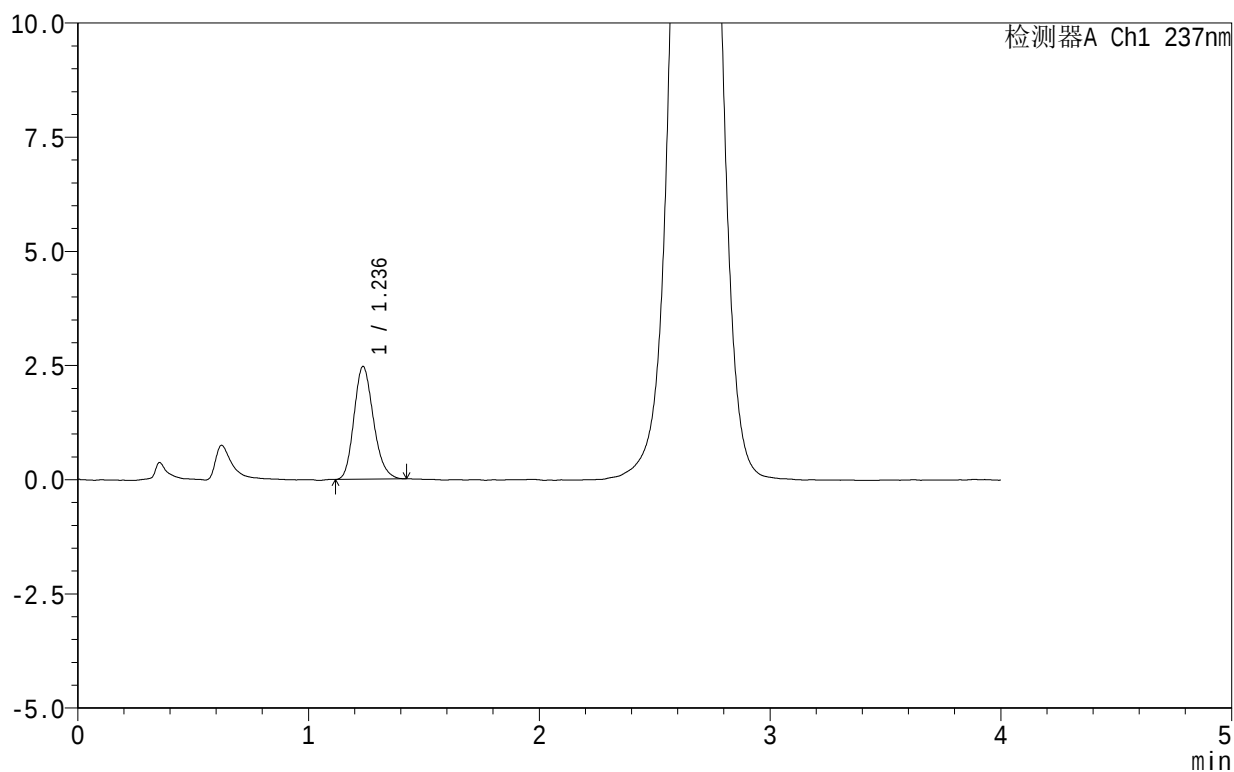

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	14458	100.000	2466	1040	1.192	--
总计		14458	100.000	2466			


图175 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-407-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:39:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

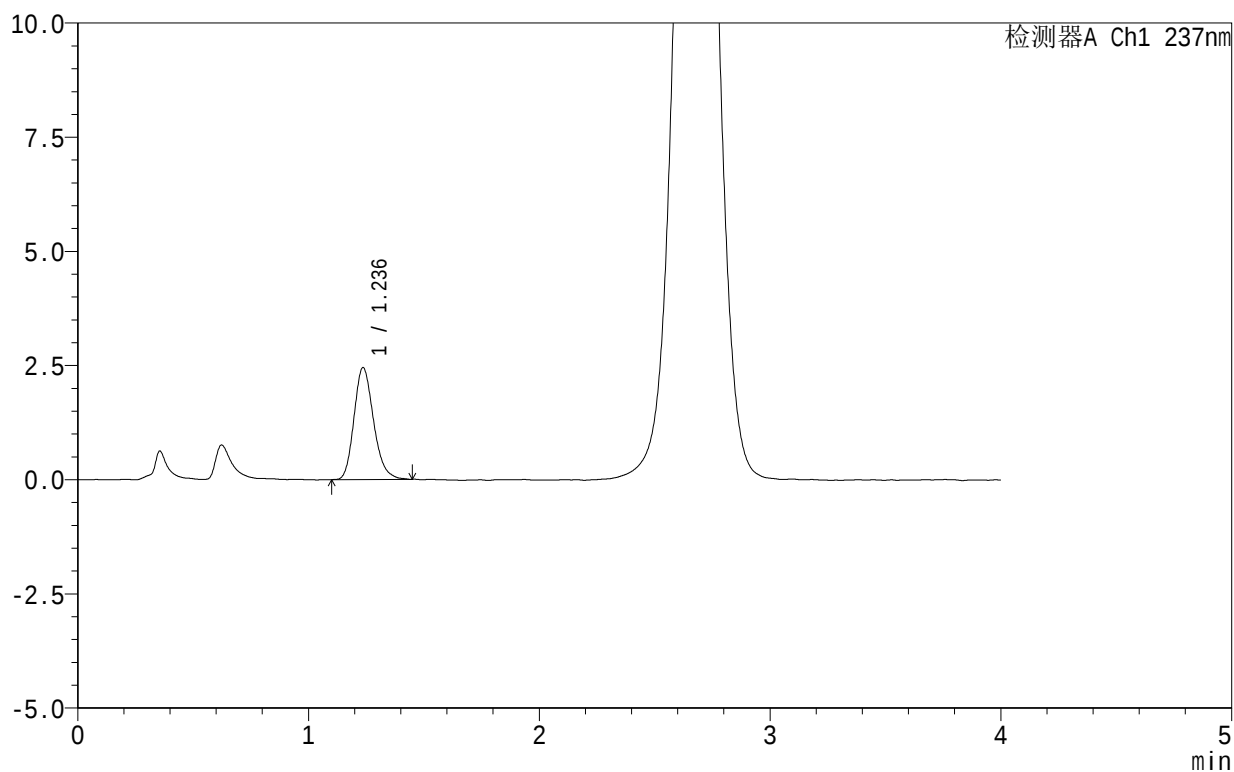

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	14485	100.000	2451	1043	1.209	--
总计		14485	100.000	2451			


图176 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-408-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:43:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

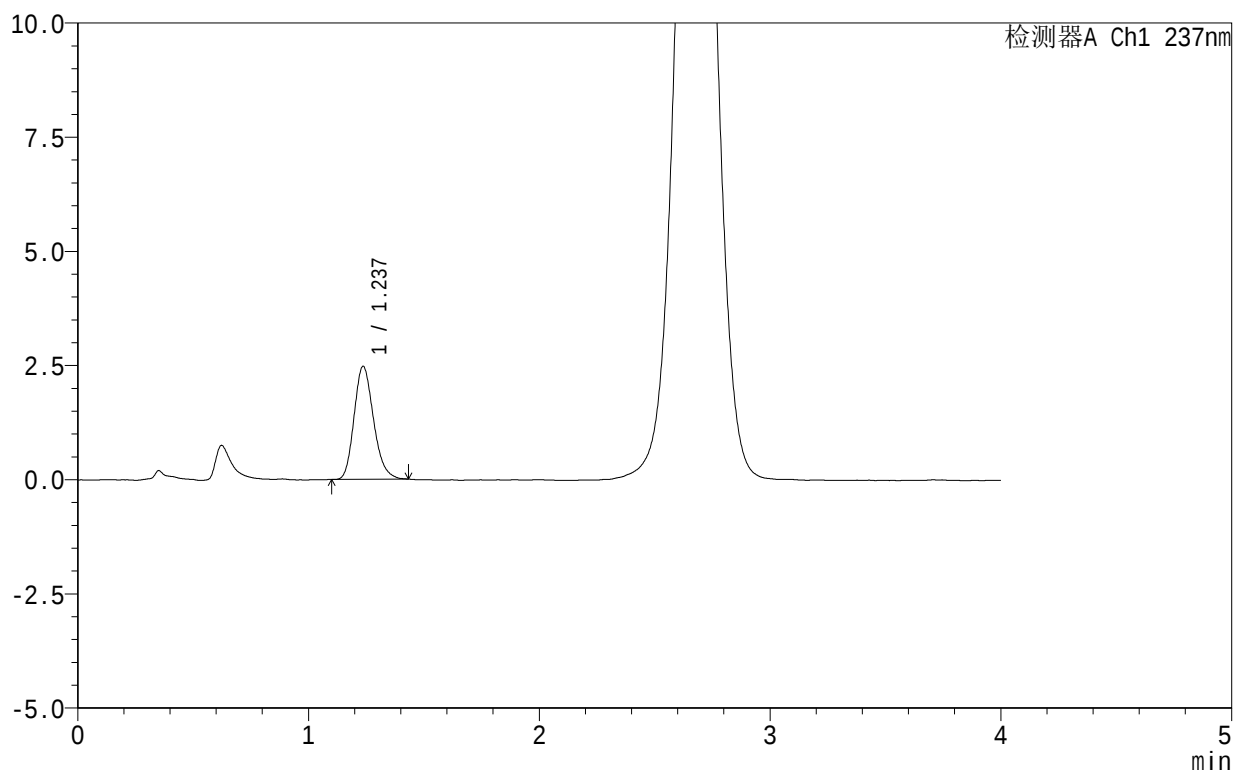

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	14489	100.000	2473	1042	1.205	--
总计		14489	100.000	2473			


图177 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-409-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:48:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

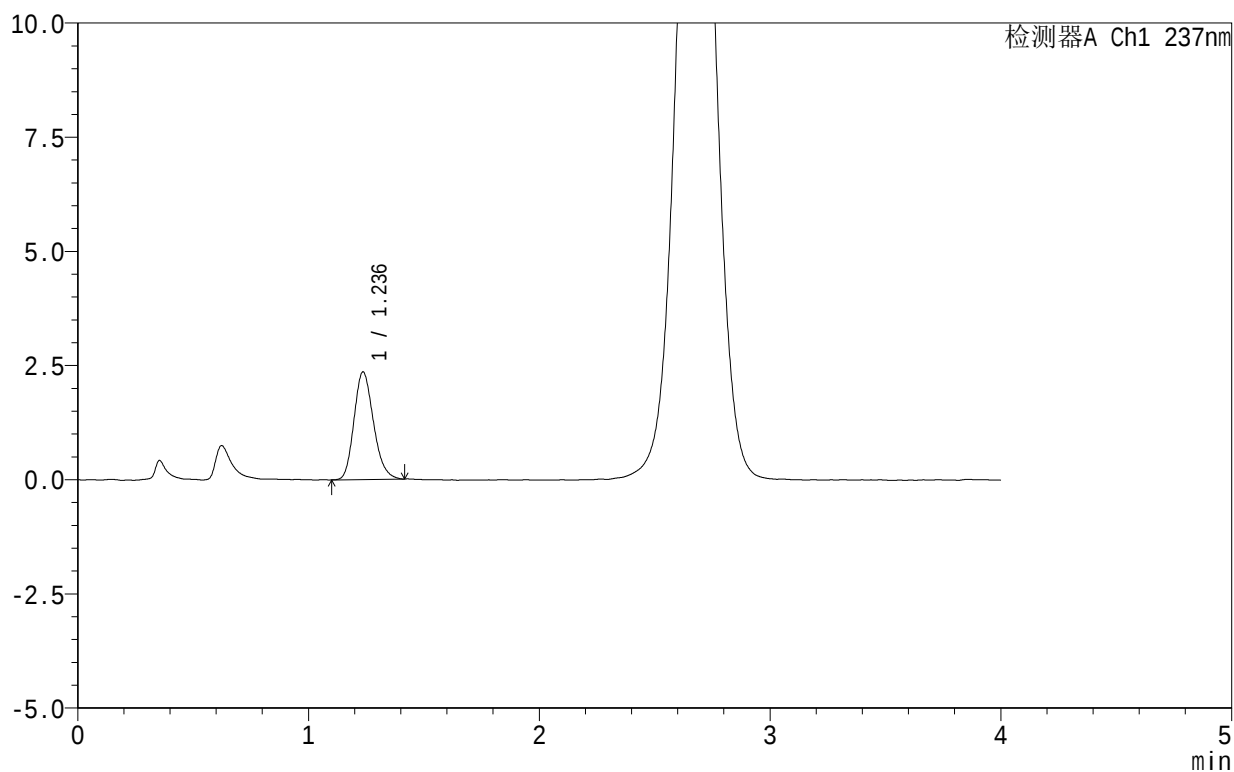

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	13811	100.000	2353	1031	1.197	--
总计		13811	100.000	2353			


图178 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-410-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:52:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

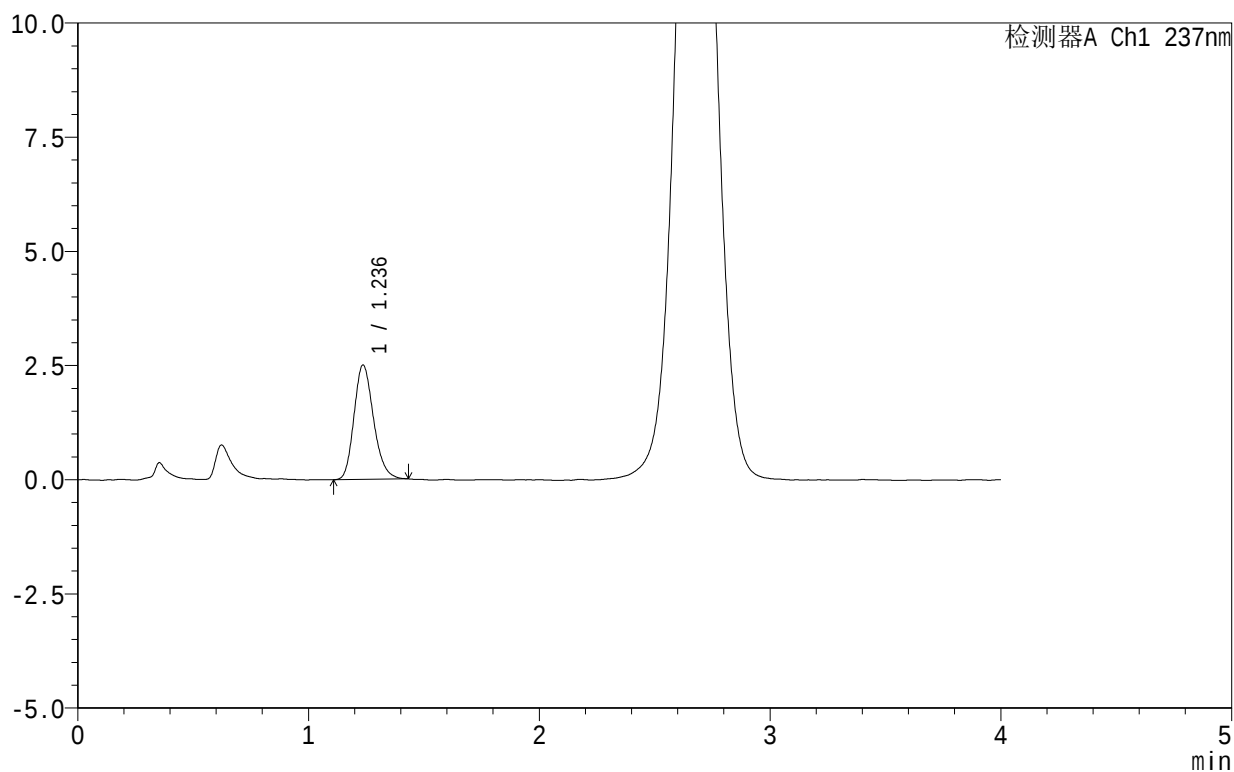

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	14758	100.000	2502	1036	1.204	--
总计		14758	100.000	2502			


图179 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-411-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:57:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

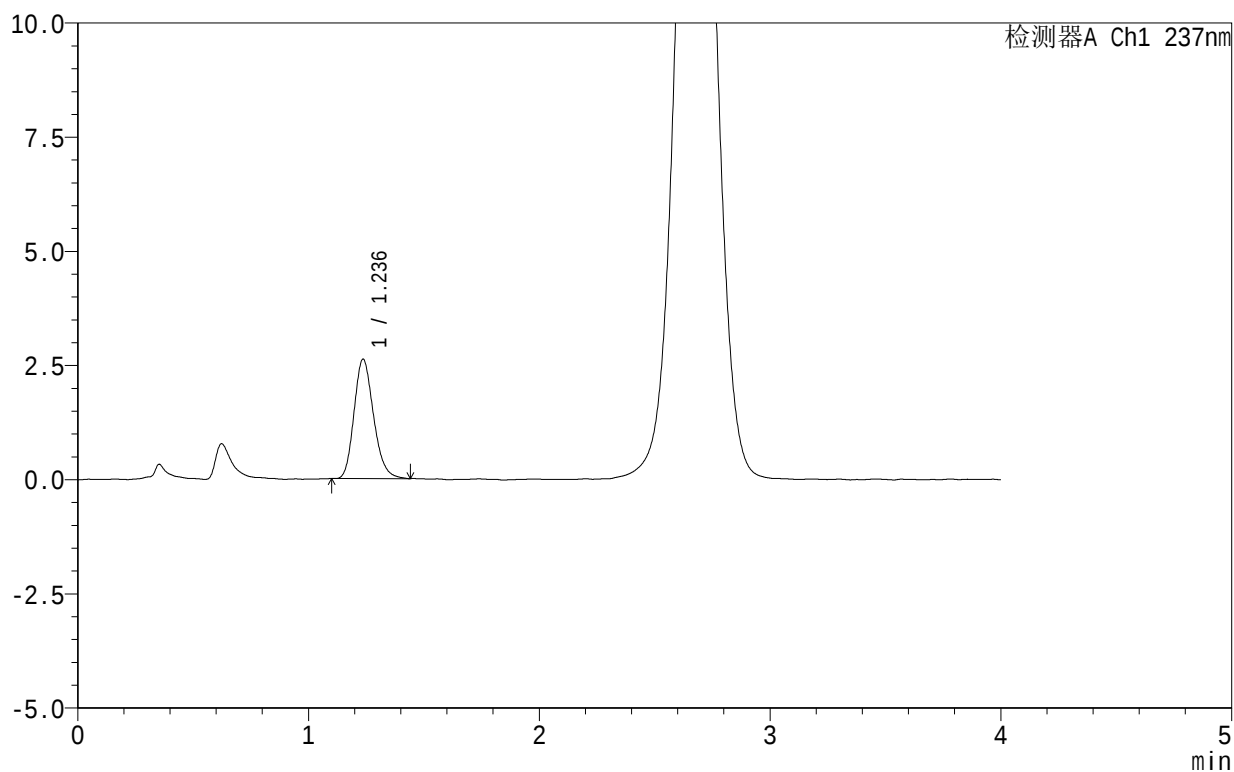

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	15355	100.000	2613	1035	1.201	--
总计		15355	100.000	2613			


图180 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-412-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 05:01:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

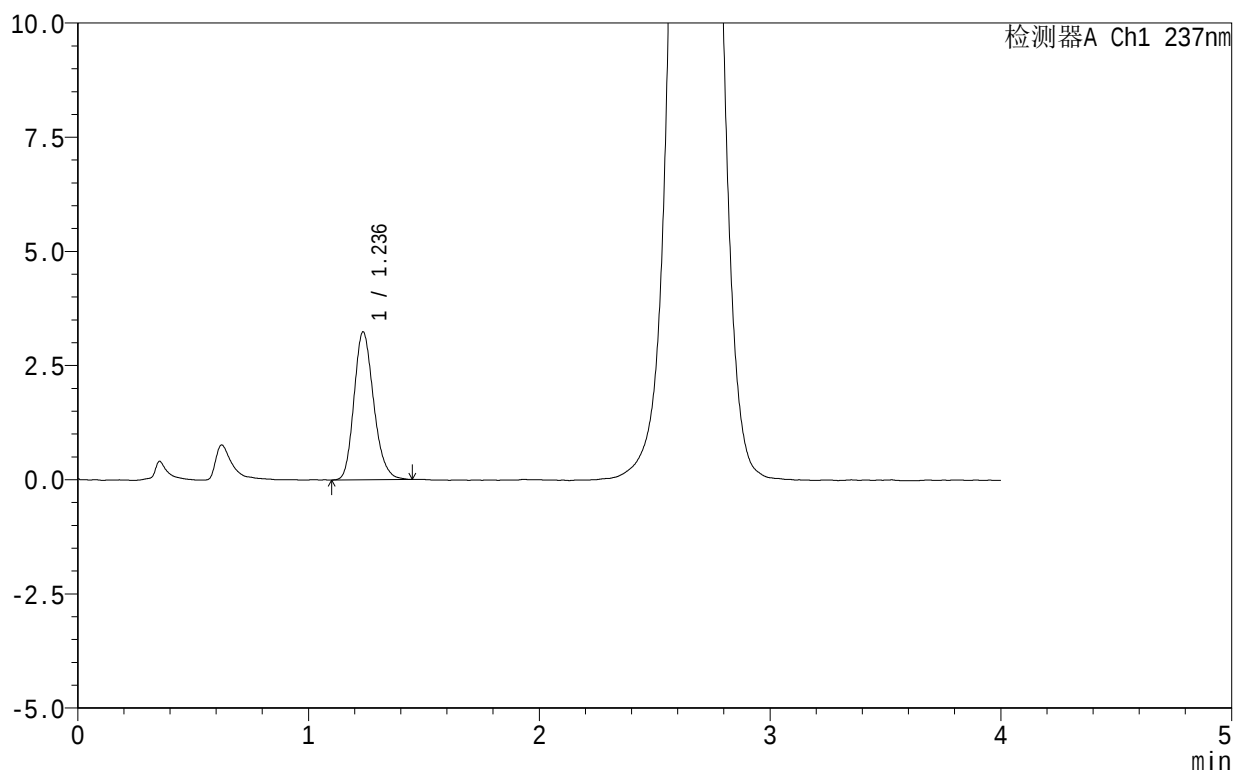

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	19107	100.000	3234	1029	1.202	--
总计		19107	100.000	3234			


图181 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-413-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 05:05:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

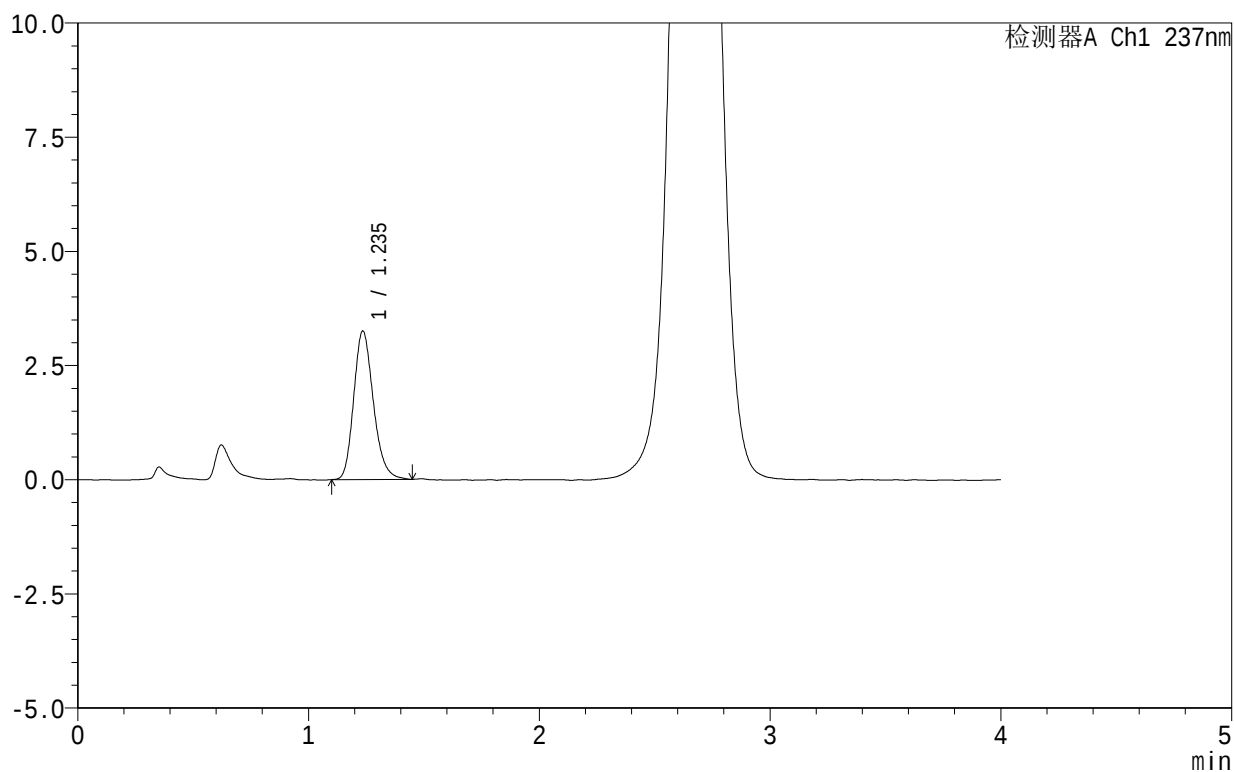

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	19253	100.000	3244	1034	1.212	--
总计		19253	100.000	3244			

图182 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-414-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 05:10:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:47:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

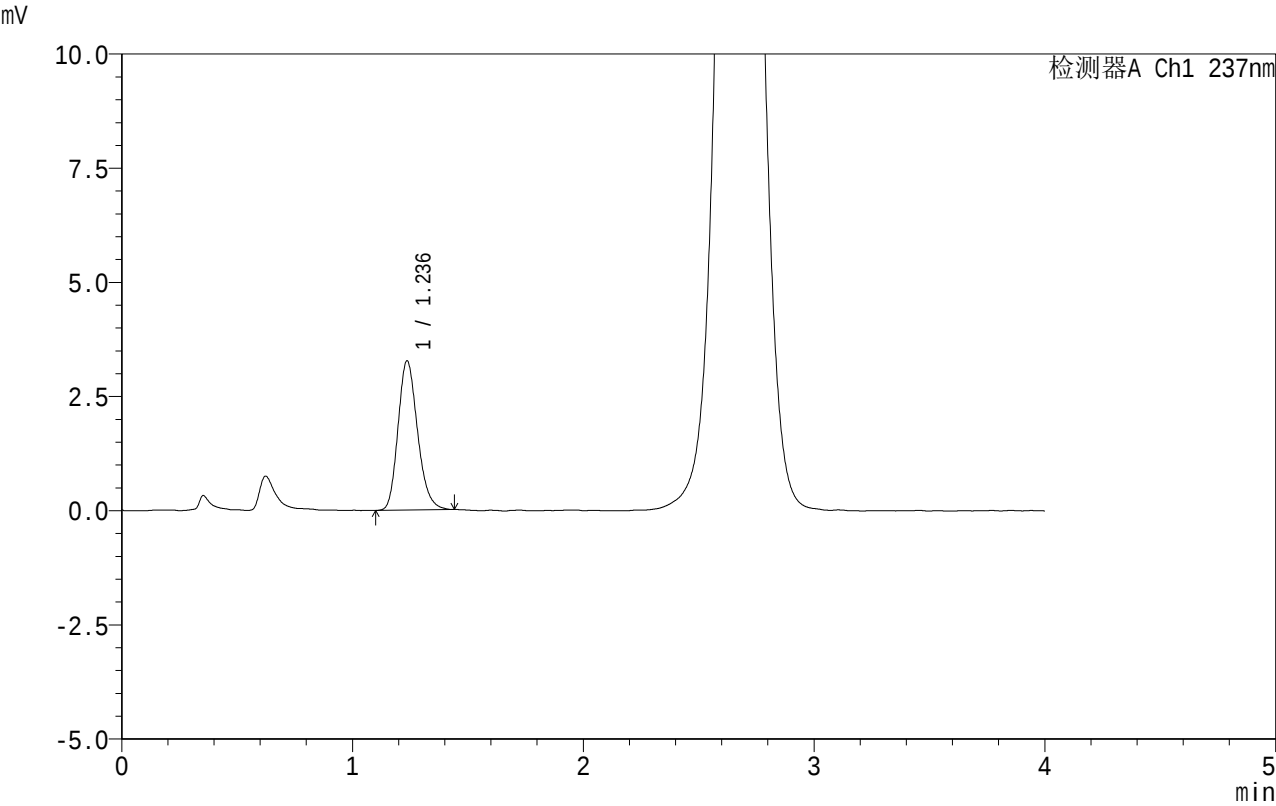

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	19222	100.000	3264	1033	1.203	--
总计		19222	100.000	3264			


图183 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-415-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 05:14:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

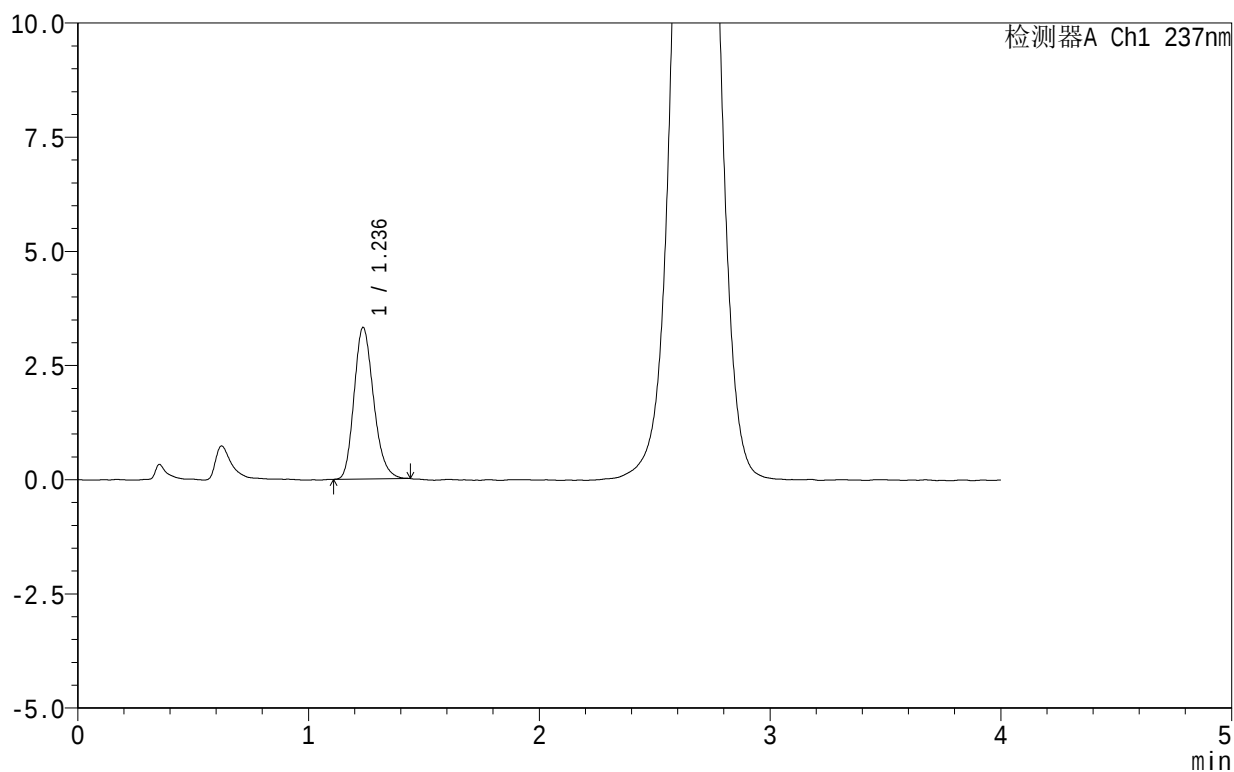

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	19492	100.000	3317	1031	1.210	--
总计		19492	100.000	3317			


图184 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-416-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 05:19:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

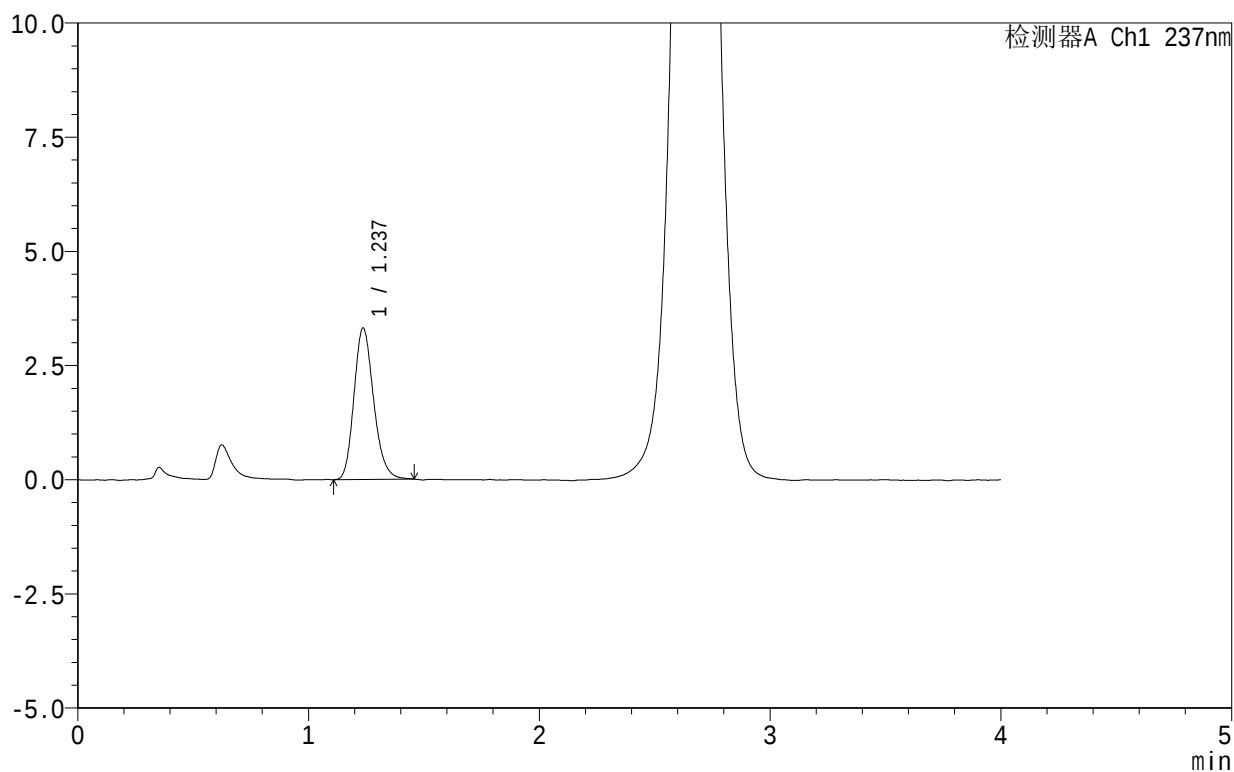

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	19599	100.000	3316	1033	1.196	--
总计		19599	100.000	3316			


图185 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-417-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 05:23:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

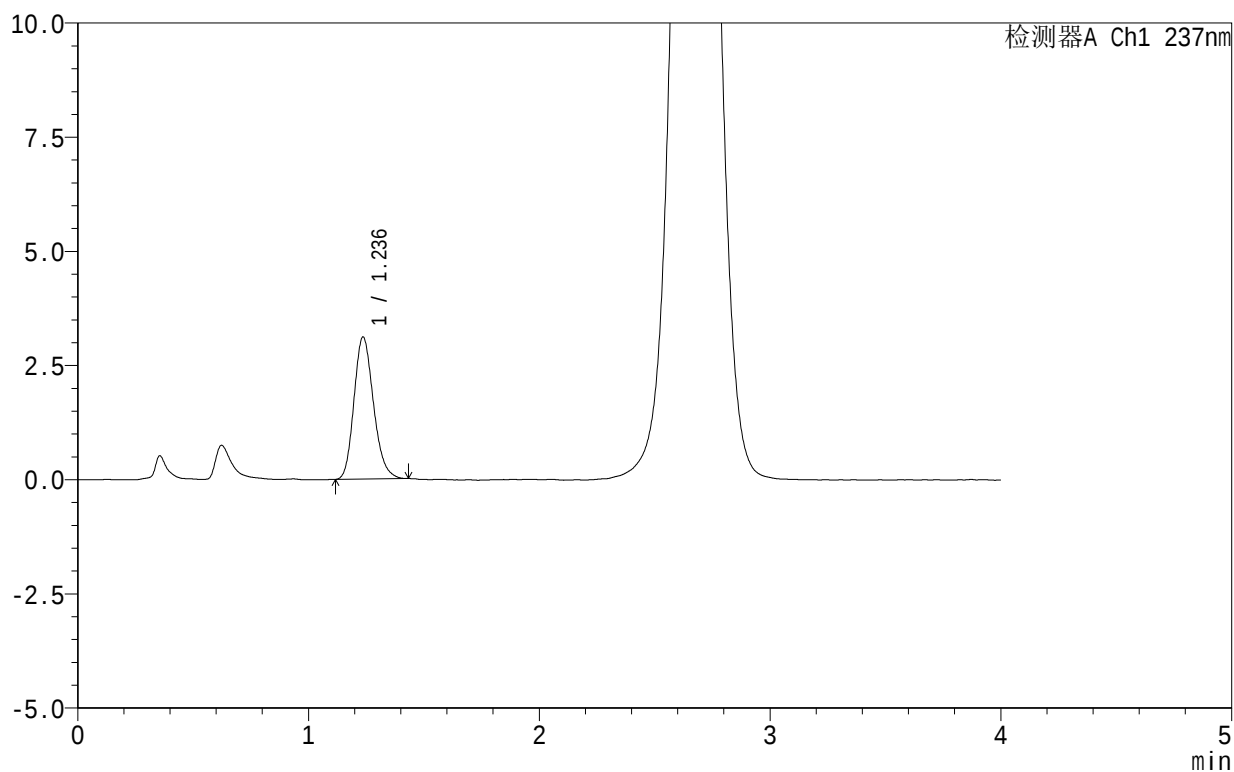

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	18265	100.000	3107	1041	1.191	--
总计		18265	100.000	3107			


图186 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-418-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 05:27:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:47:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

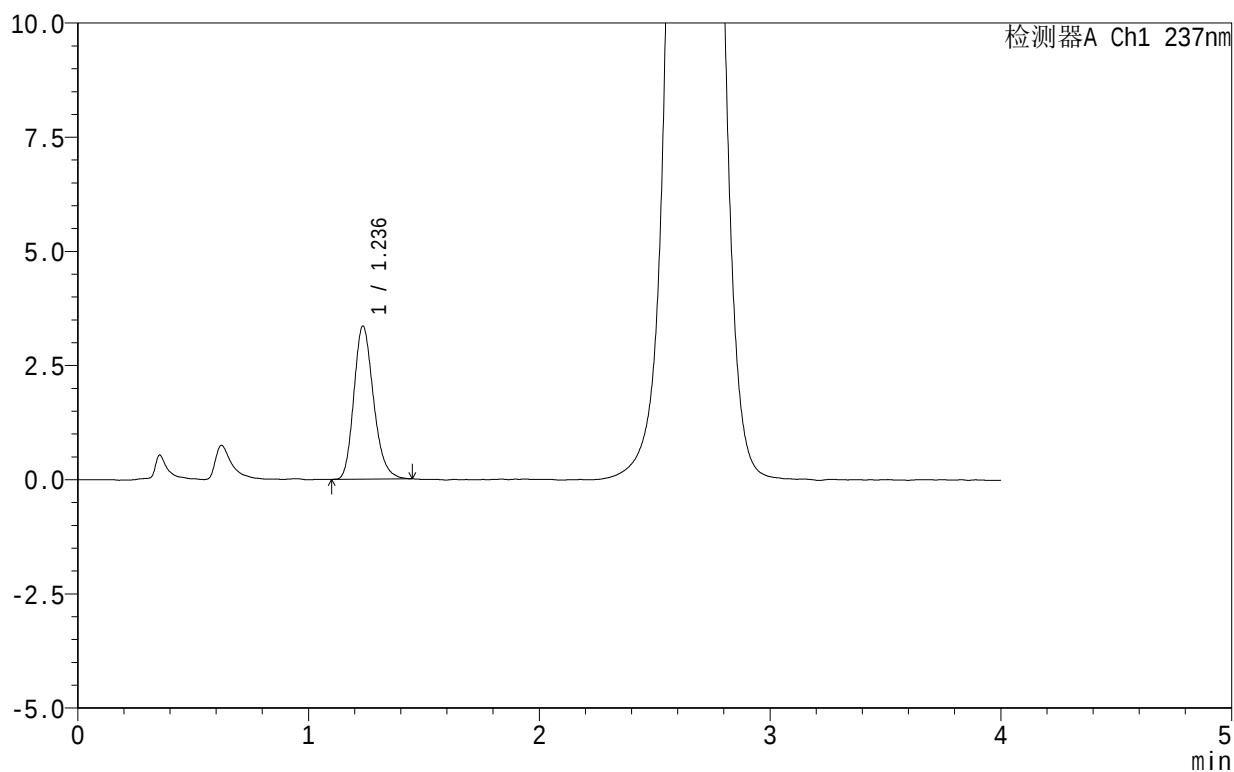

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	19833	100.000	3348	1031	1.213	--
总计		19833	100.000	3348			

图187 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-419-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 05:32:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:47:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

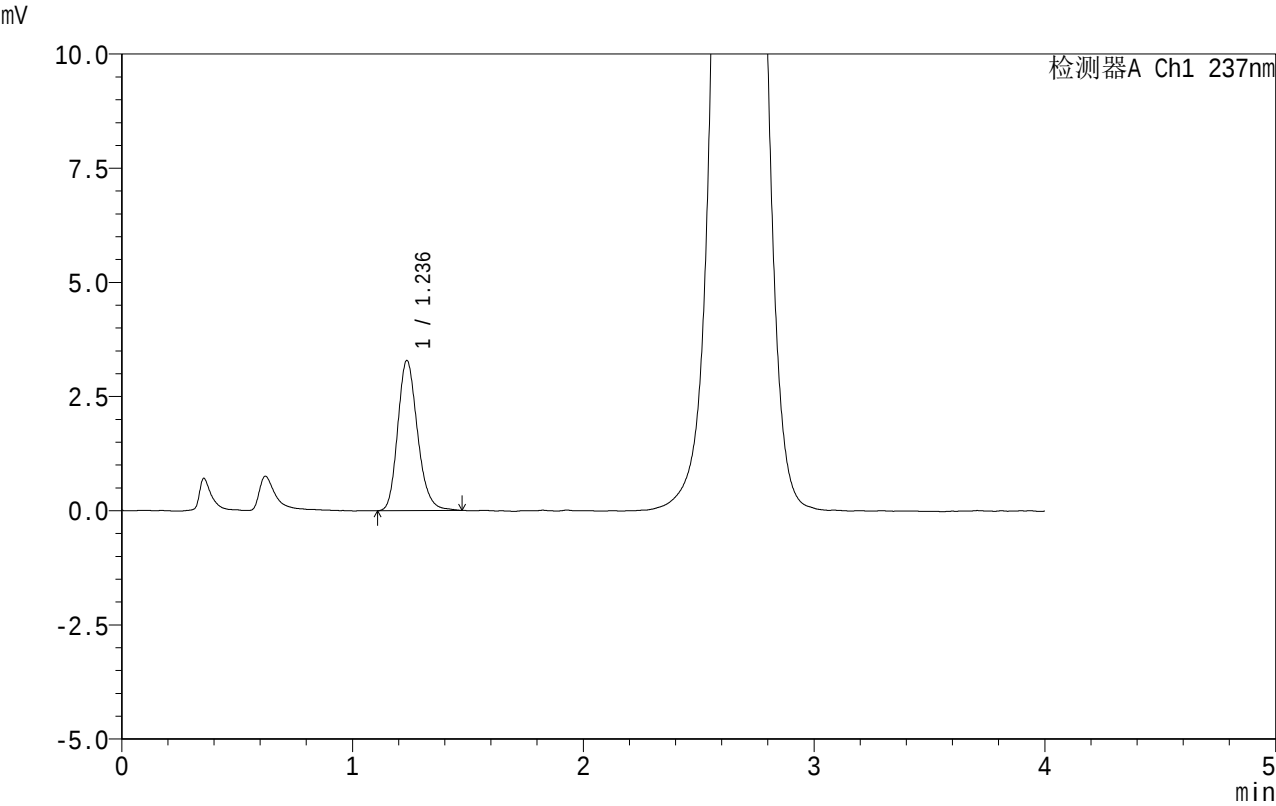

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	19624	100.000	3282	1019	1.203	--
总计		19624	100.000	3282			


图188 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-420-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 05:36:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:48:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

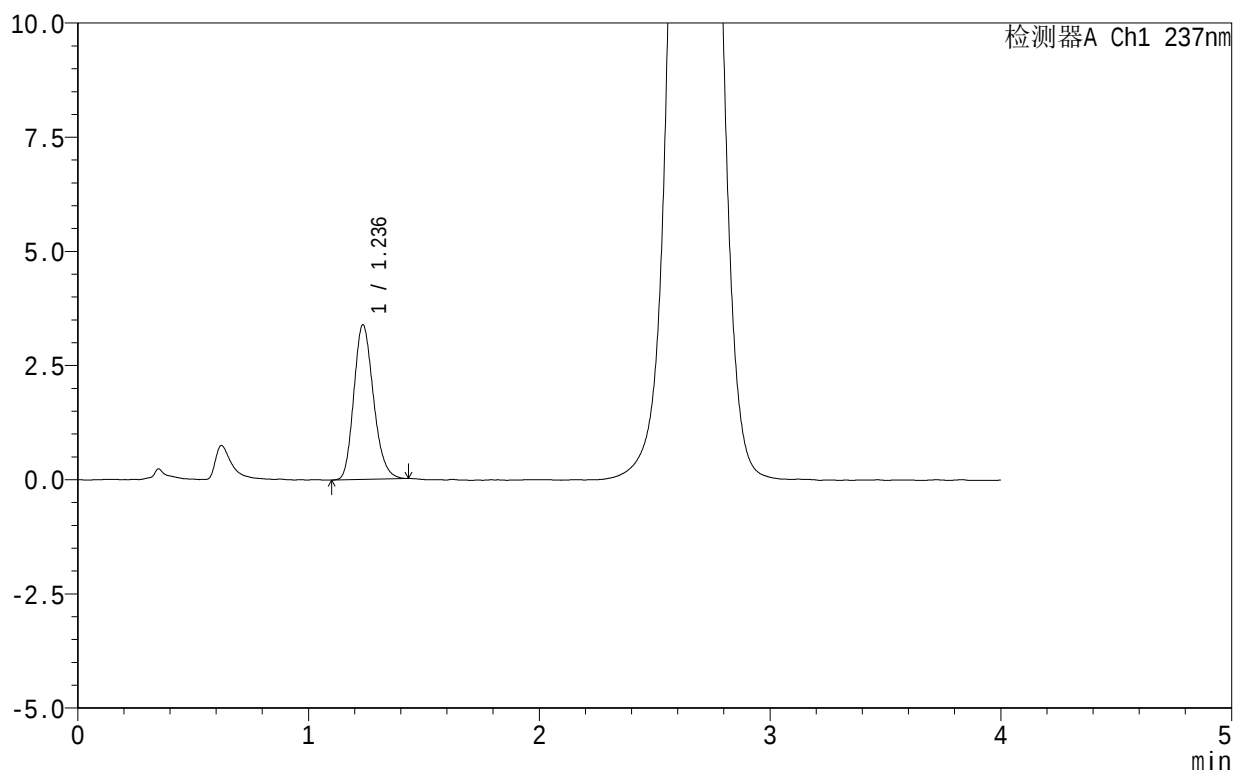

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	19990	100.000	3380	1020	1.200	--
总计		19990	100.000	3380			


图189 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-421-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 05:41:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:48:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

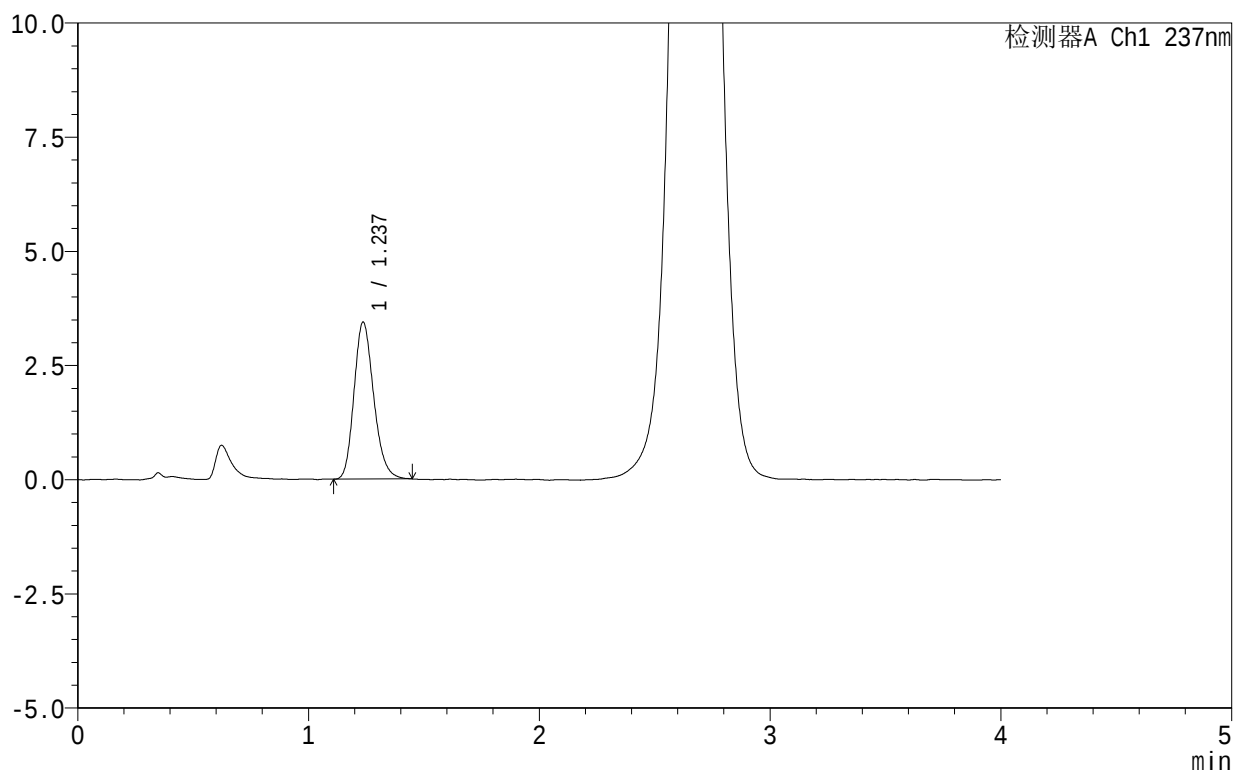

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	20354	100.000	3435	1026	1.200	--
总计		20354	100.000	3435			


图190 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-422-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 05:45:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:48:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

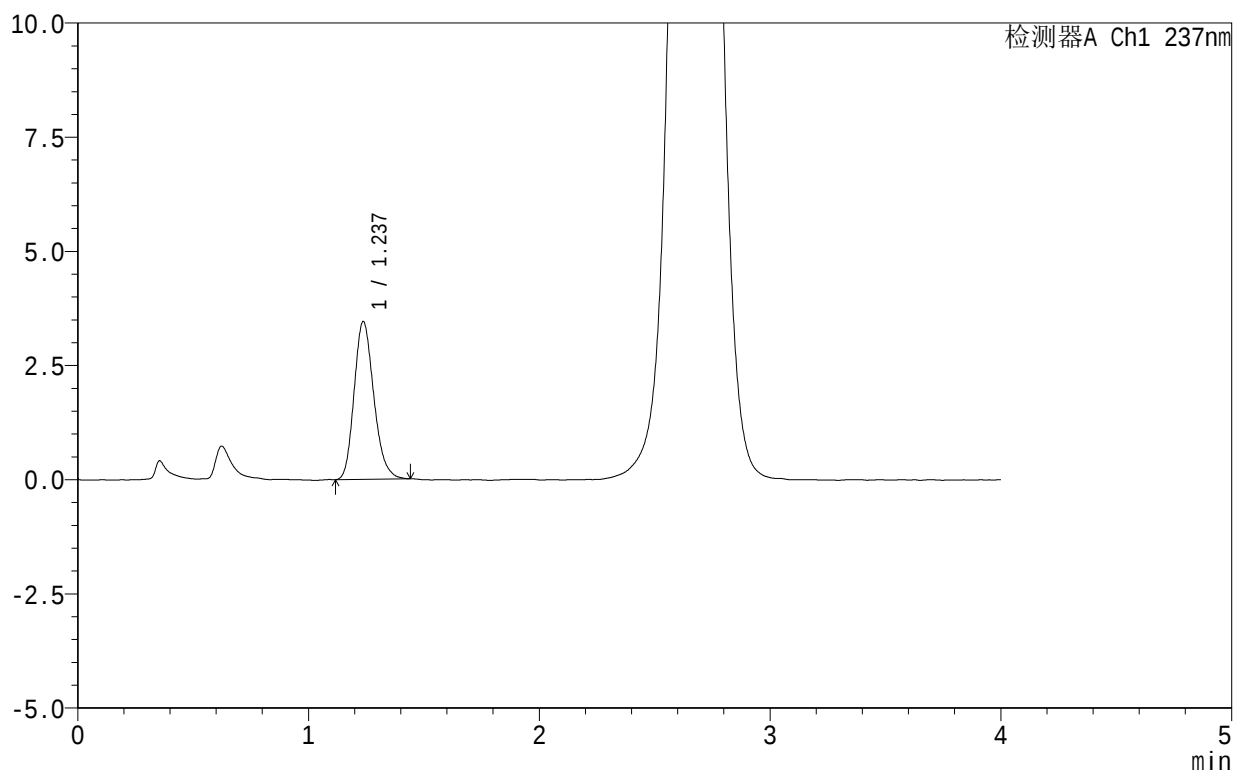

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	20450	100.000	3456	1021	1.206	--
总计		20450	100.000	3456			

图191 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-423-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 05:49:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:48:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

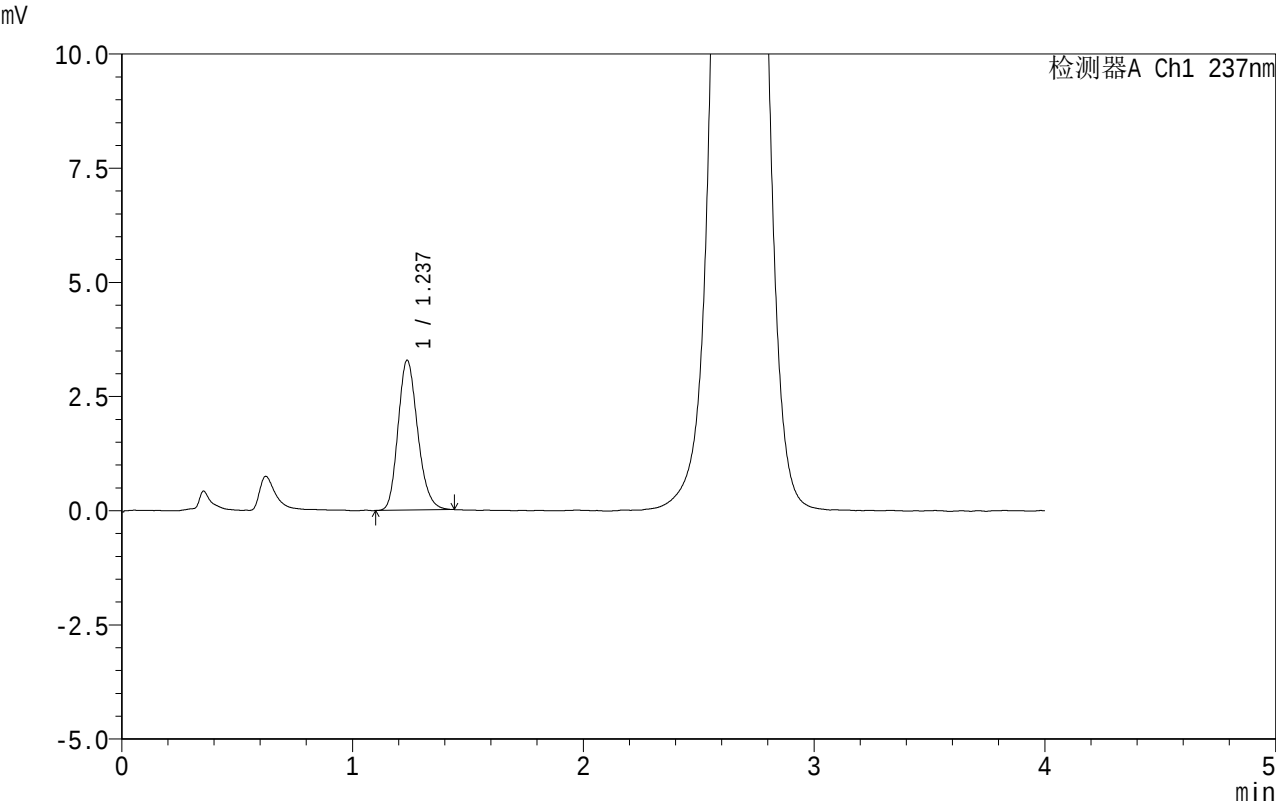

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	19415	100.000	3282	1022	1.197	--
总计		19415	100.000	3282			


图192 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-424-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 05:54:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:48:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

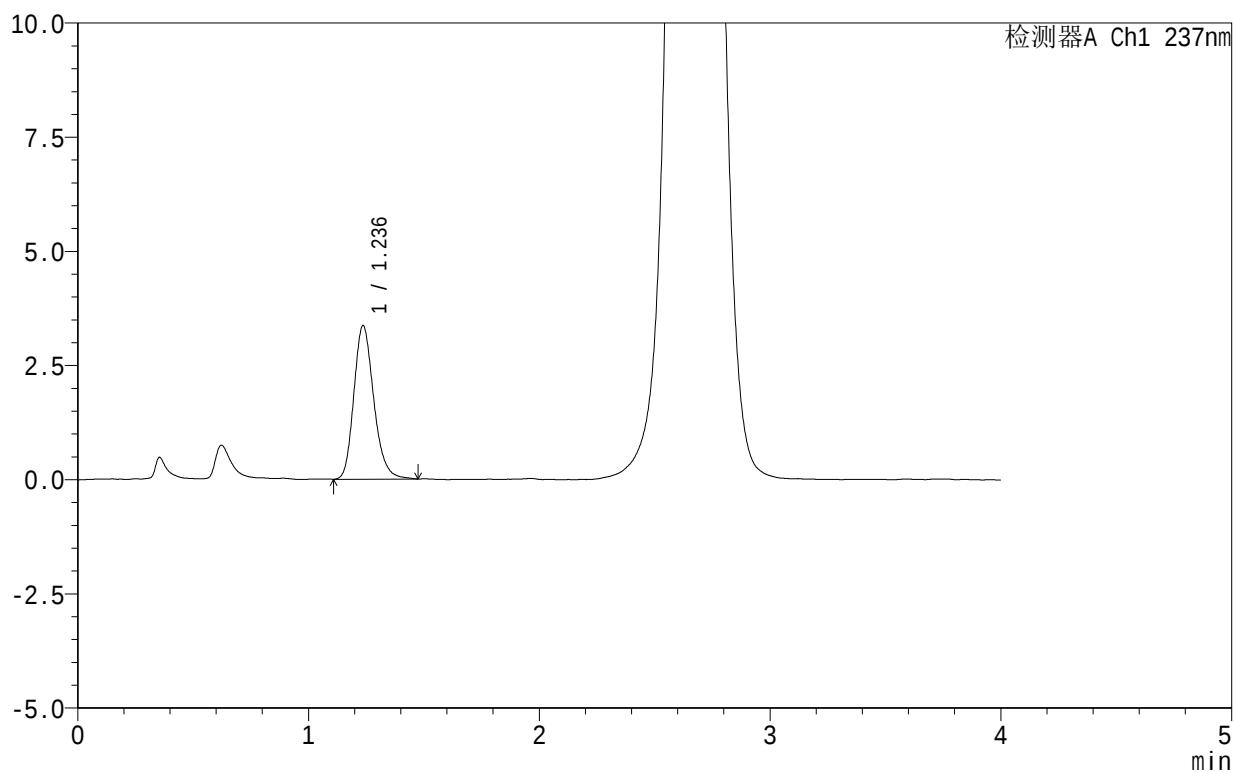

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	20140	100.000	3359	1014	1.212	--
总计		20140	100.000	3359			

图193 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-425-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 05:58:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:48:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

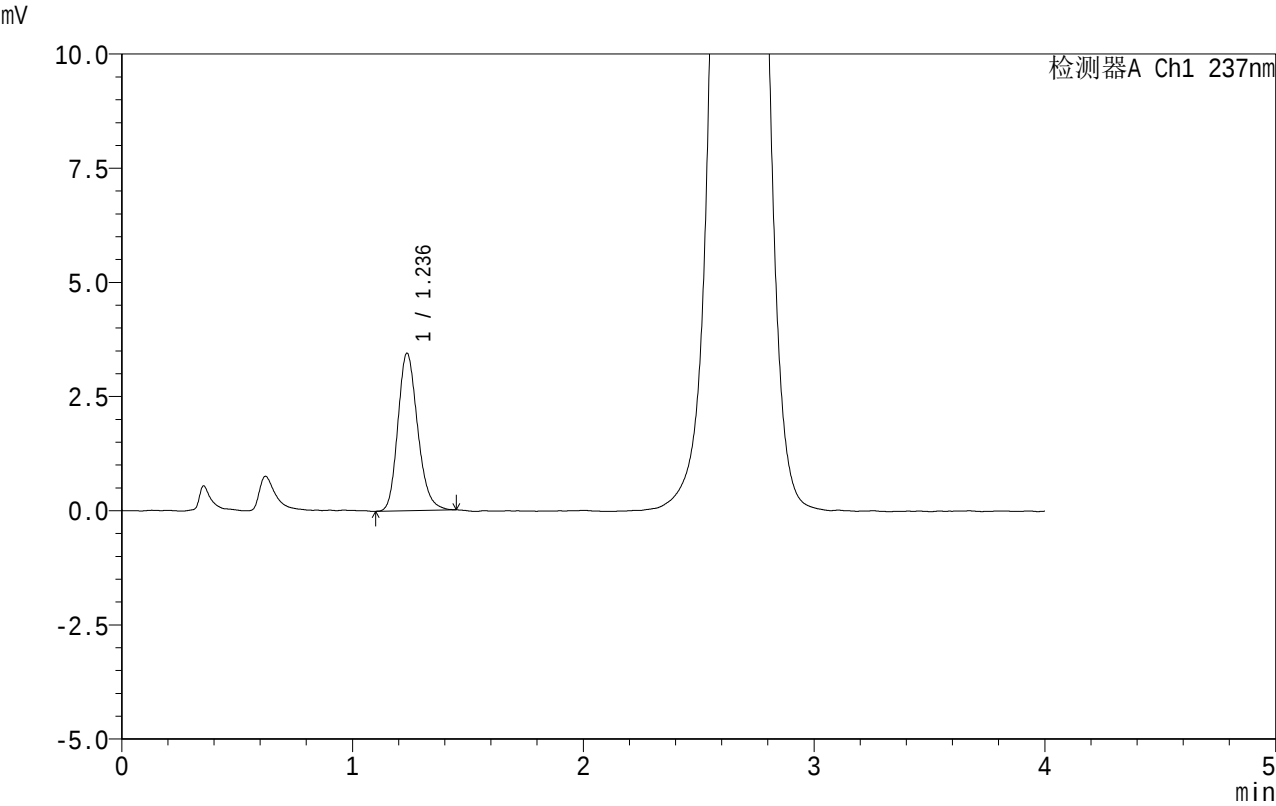

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	20540	100.000	3446	1016	1.202	--
总计		20540	100.000	3446			


图194 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-426-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 06:02:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:48:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

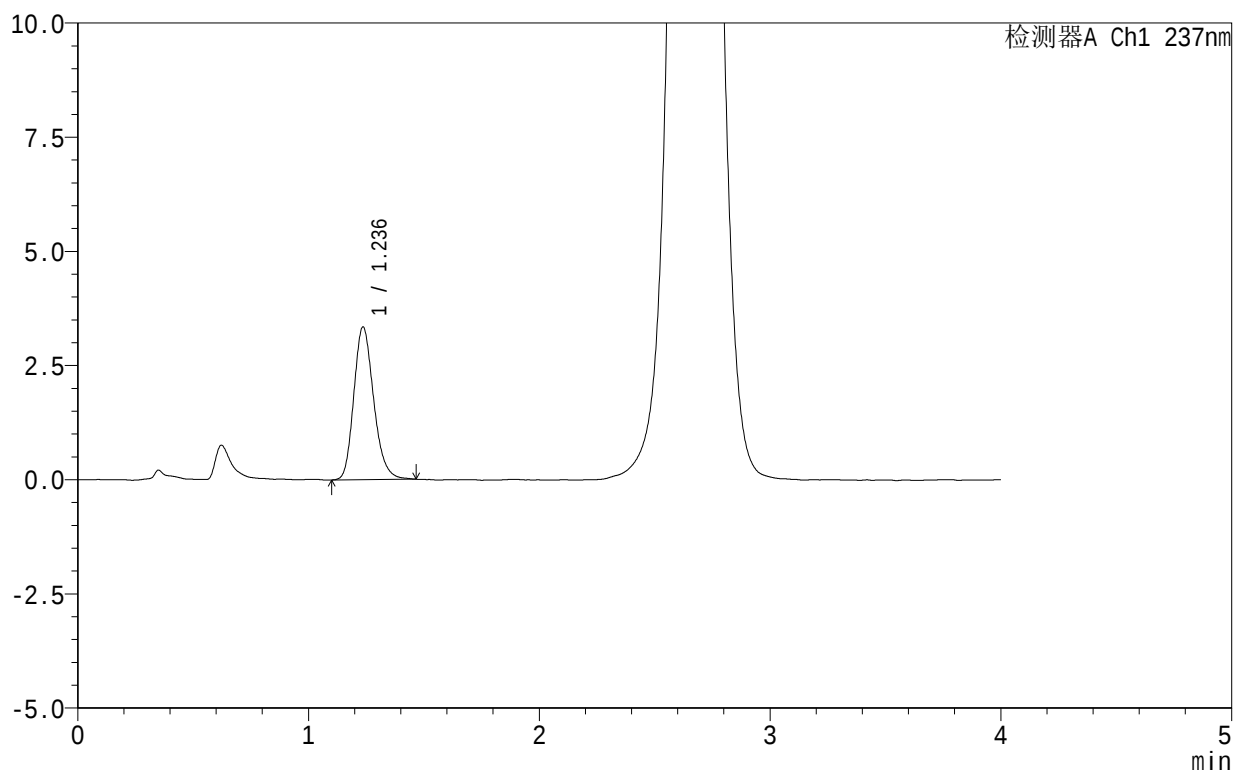

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	19981	100.000	3339	1009	1.207	--
总计		19981	100.000	3339			


图195 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-427-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 06:07:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:48:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

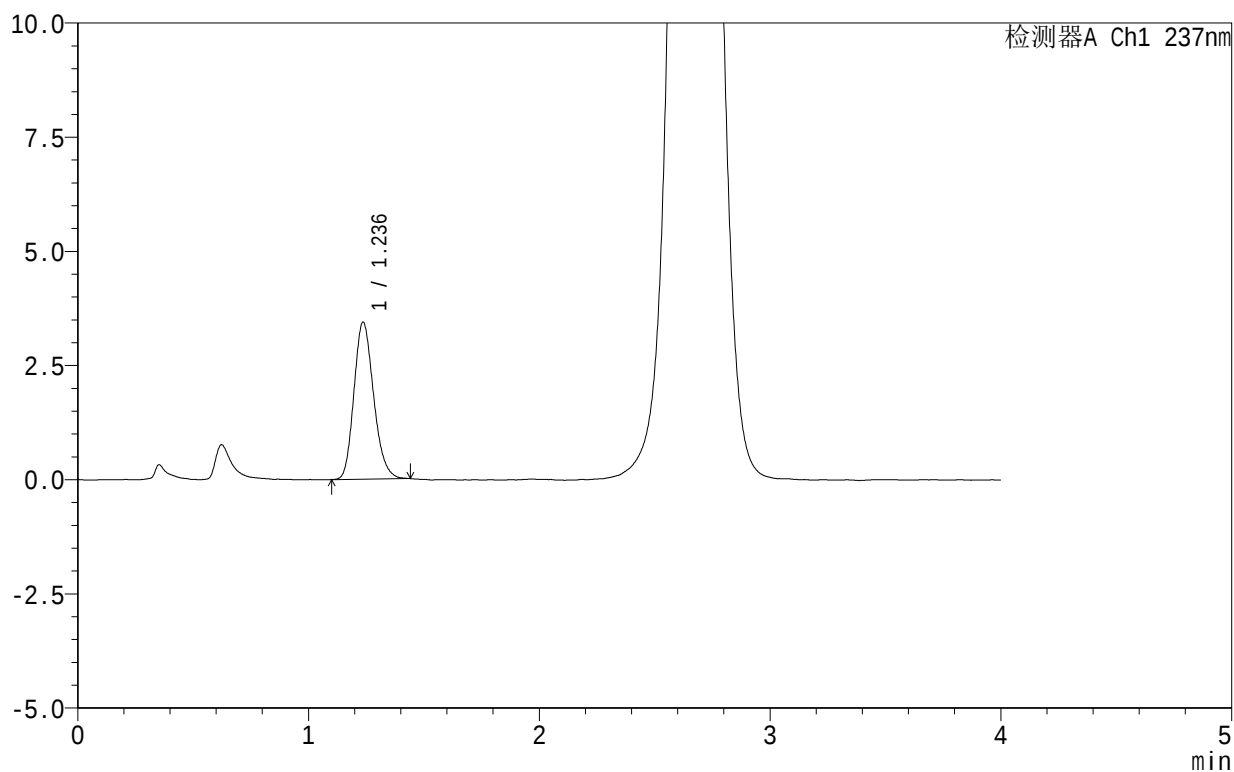

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	20359	100.000	3436	1014	1.193	--
总计		20359	100.000	3436			


图196 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-428-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 06:11:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:48:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

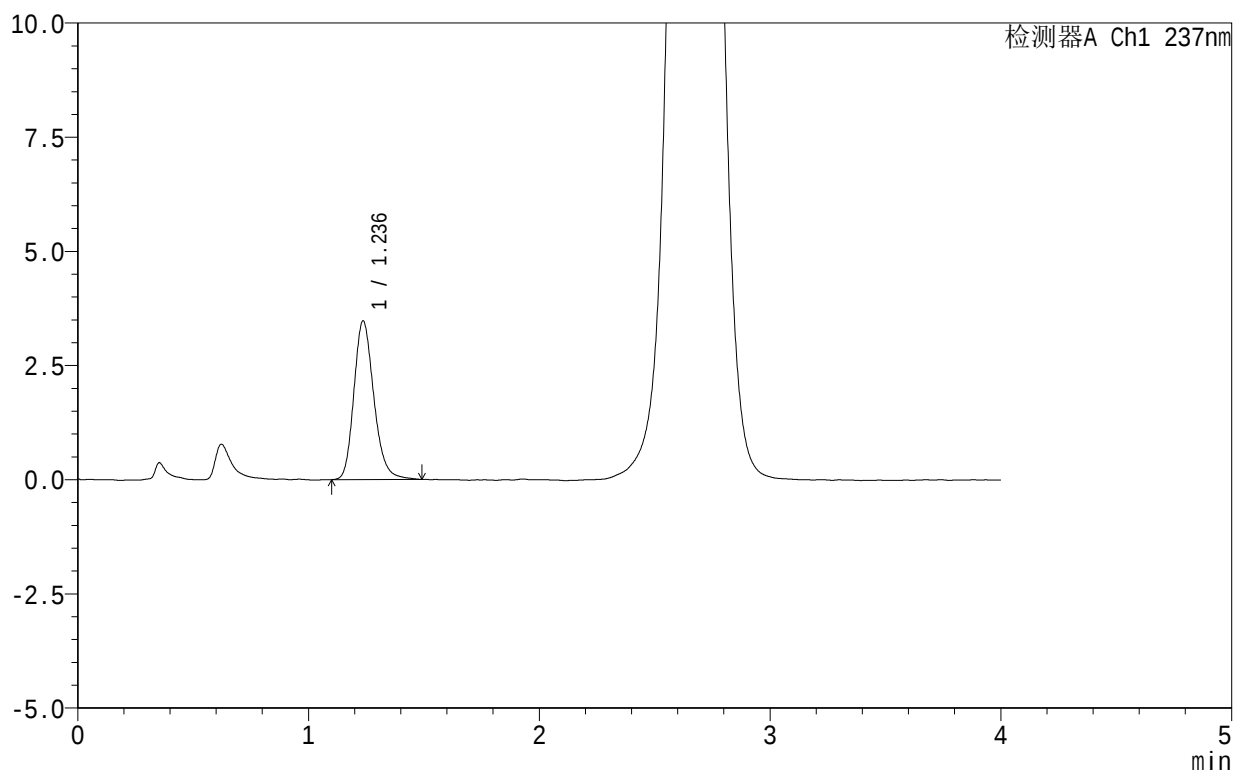

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	20888	100.000	3471	1015	1.210	--
总计		20888	100.000	3471			


图197 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-429-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 06:16:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:48:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

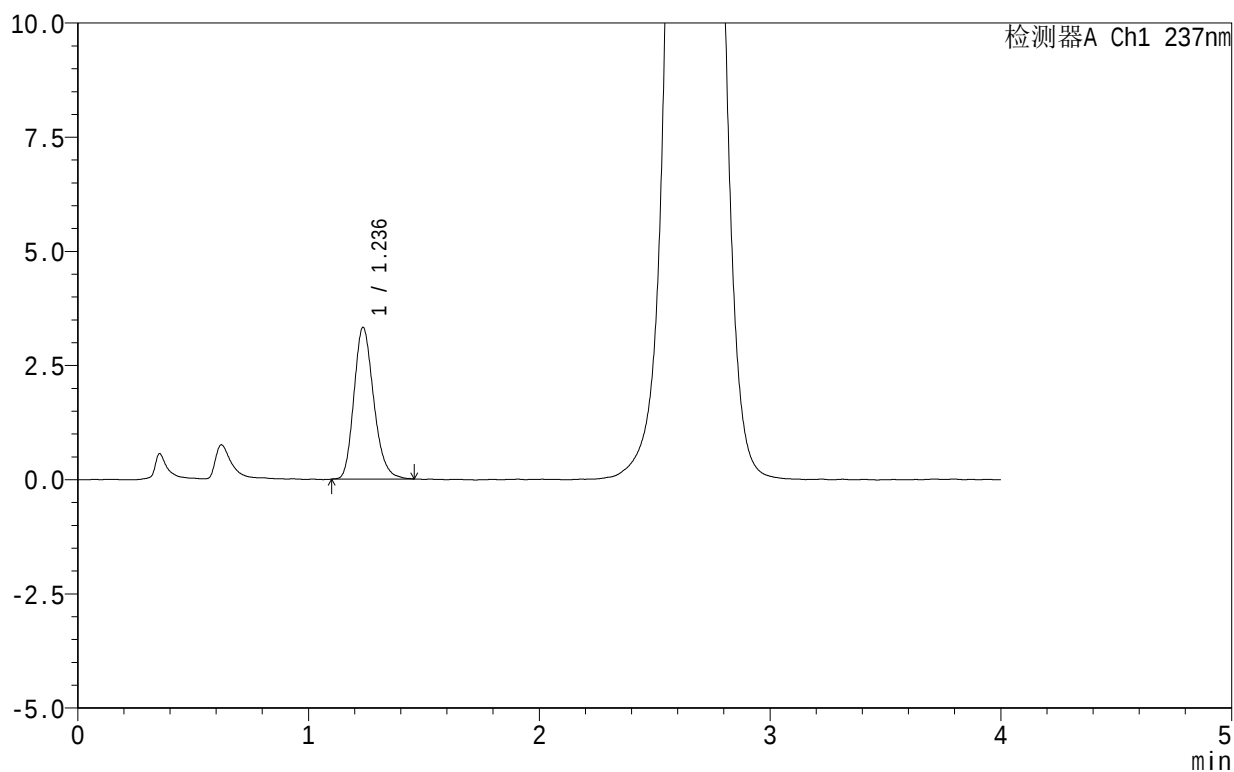

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	19802	100.000	3320	1011	1.214	--
总计		19802	100.000	3320			

图198 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-430-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 06:20:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:48:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

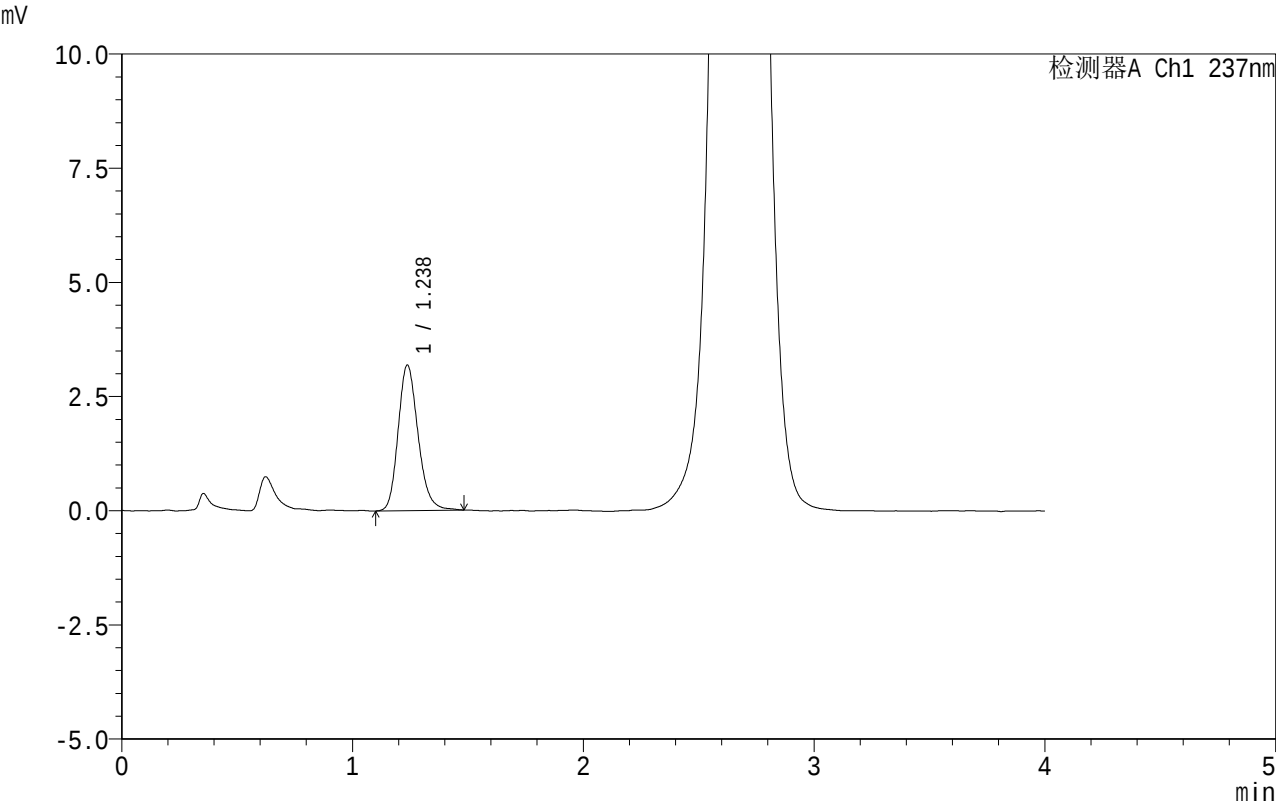

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	19149	100.000	3189	1007	1.194	--
总计		19149	100.000	3189			


图199 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-431-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 06:24:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:48:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

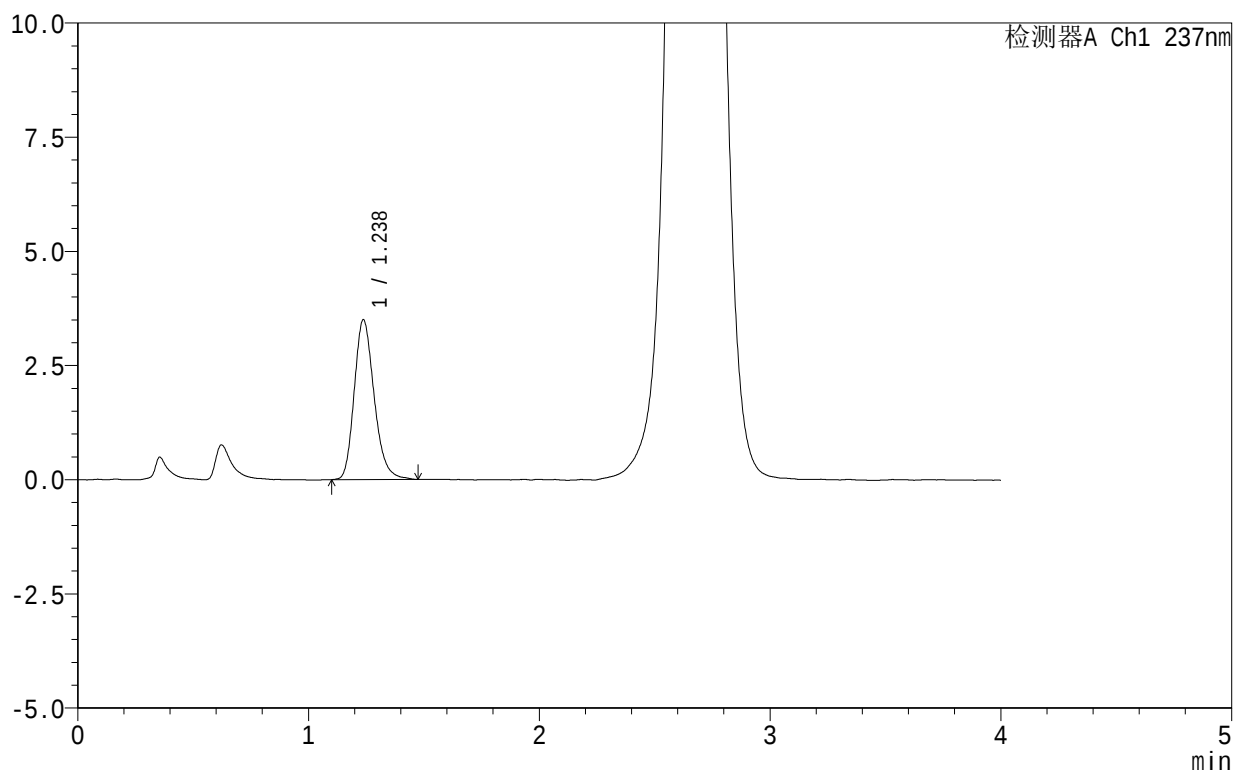

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	21035	100.000	3502	1008	1.219	--
总计		21035	100.000	3502			

图200 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-432-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 06:29:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:48:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

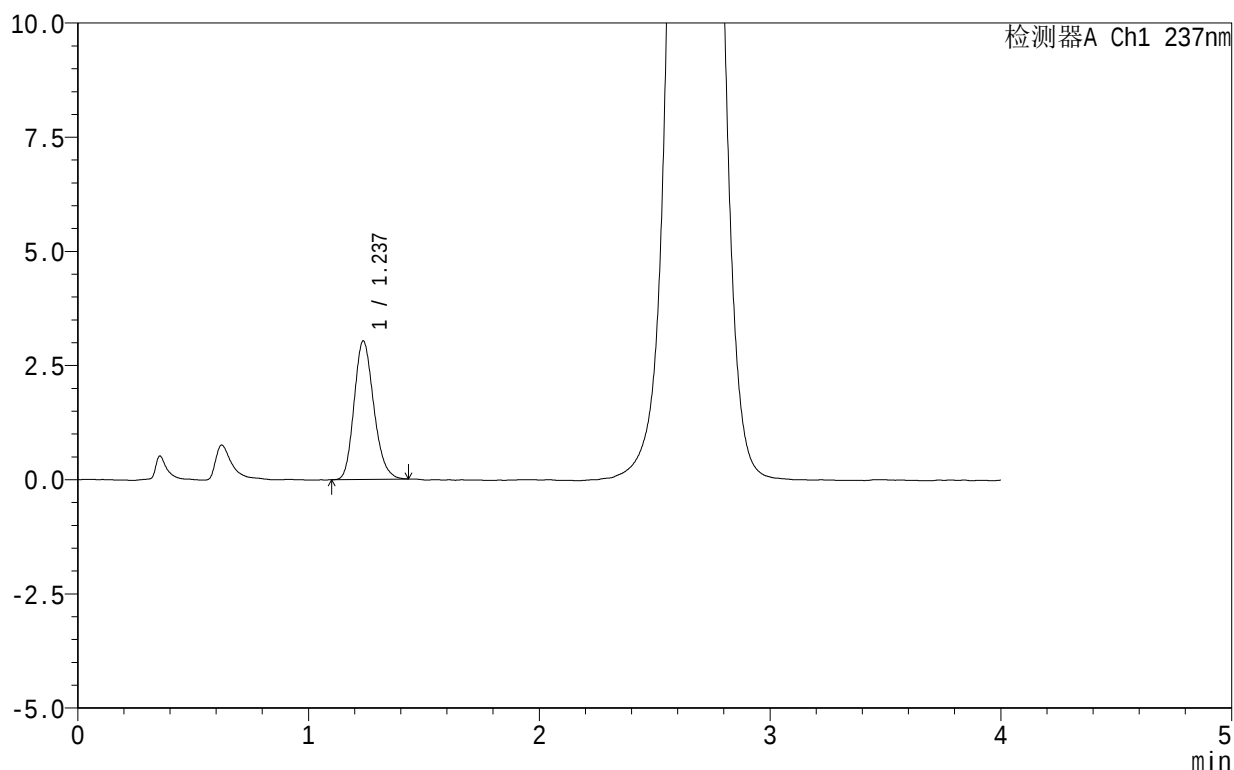

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	17958	100.000	3033	1022	1.193	--
总计		17958	100.000	3033			

图201 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

201




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-433-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 06:33:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:48:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

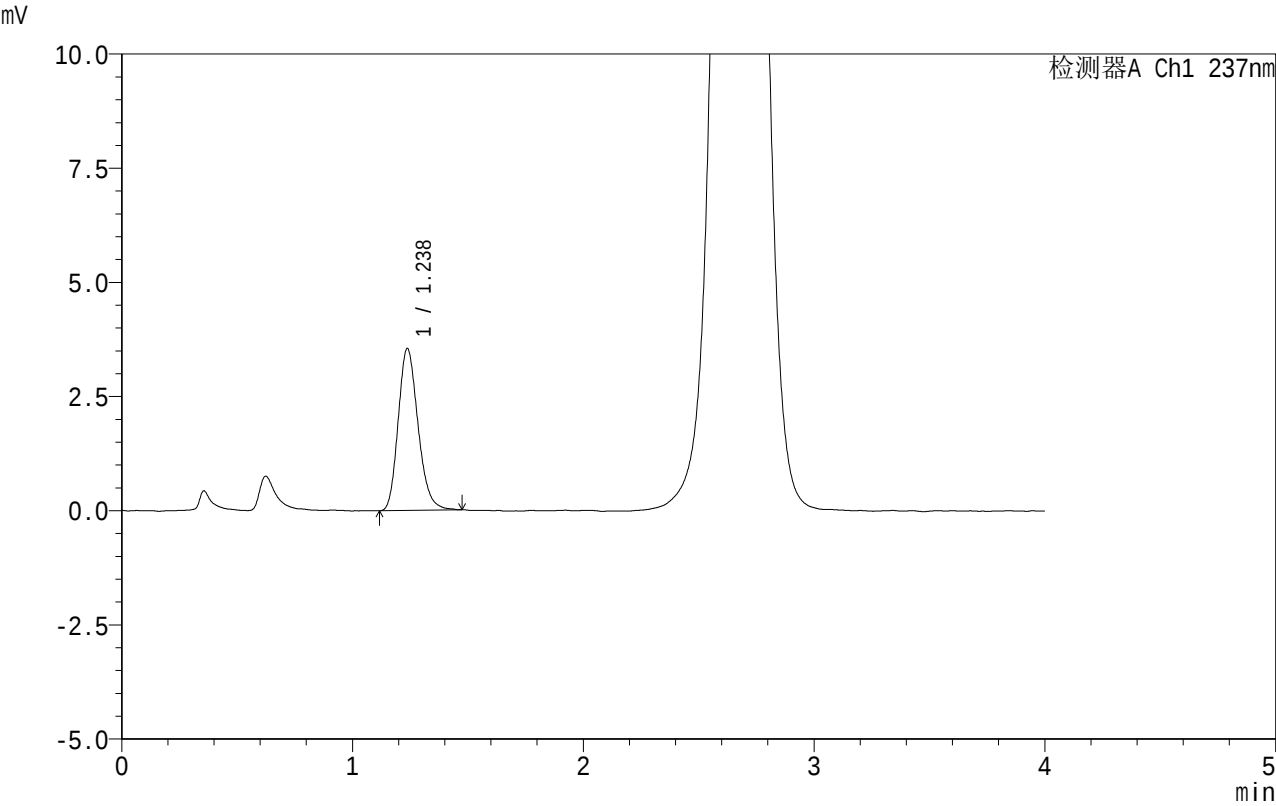

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	21223	100.000	3547	1003	1.206	--
总计		21223	100.000	3547			

图202 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-434-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 06:38:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:48:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

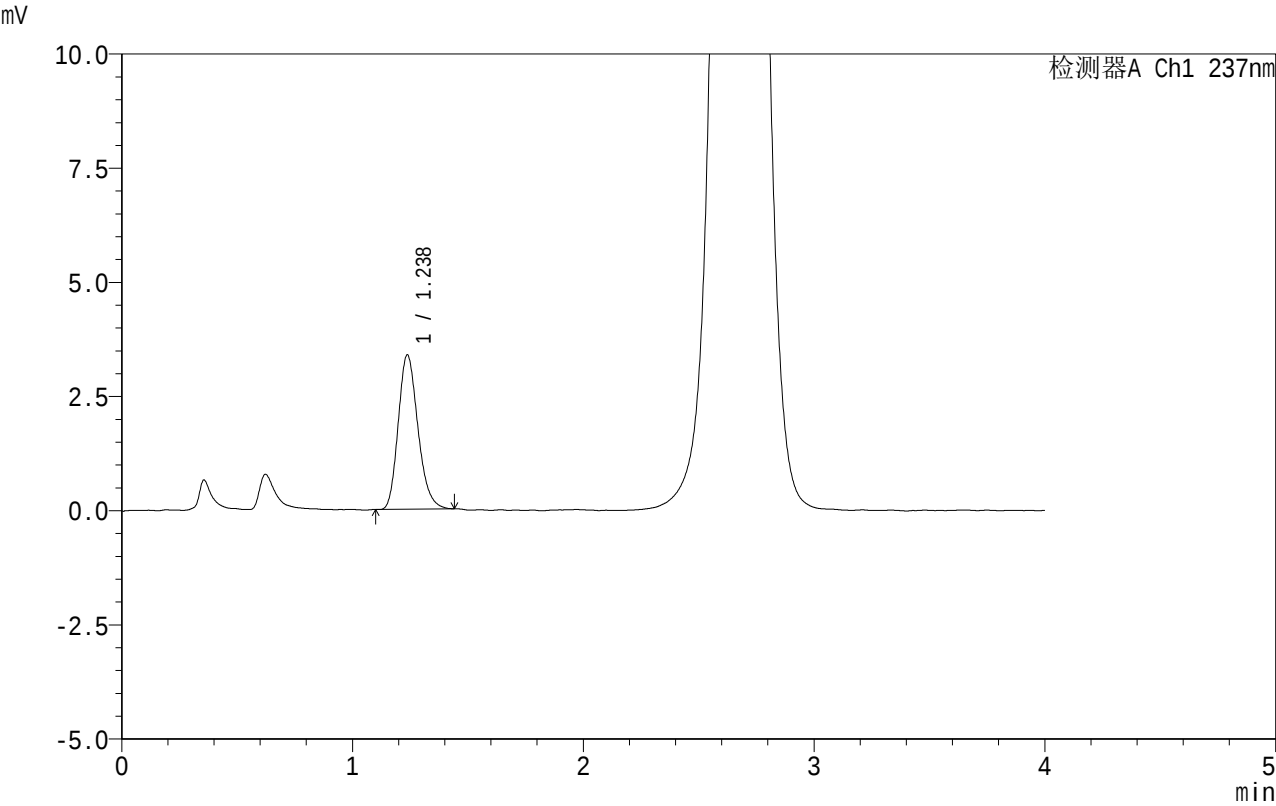

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	20074	100.000	3379	1019	1.210	--
总计		20074	100.000	3379			

图203 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-435-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 06:42:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:48:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

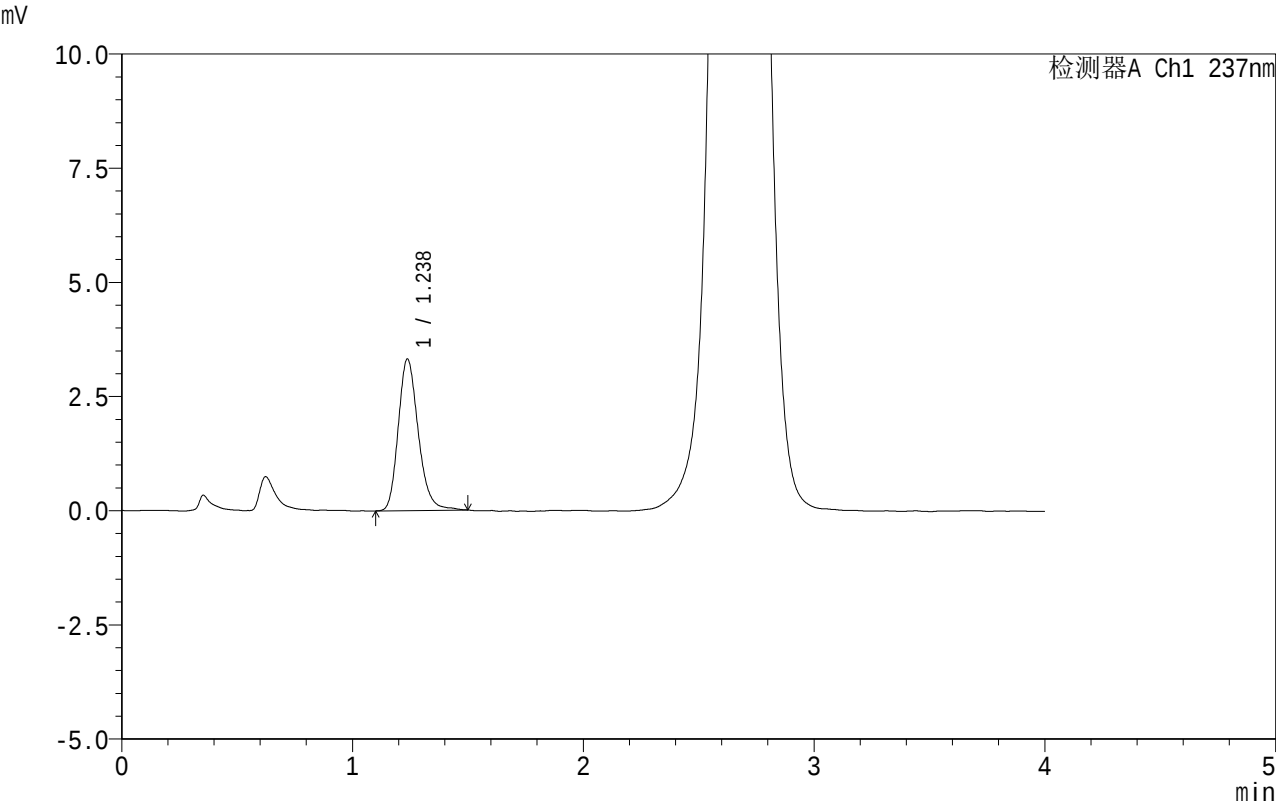

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	20007	100.000	3318	1010	1.214	--
总计		20007	100.000	3318			


图204 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-436-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 06:46:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:48:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

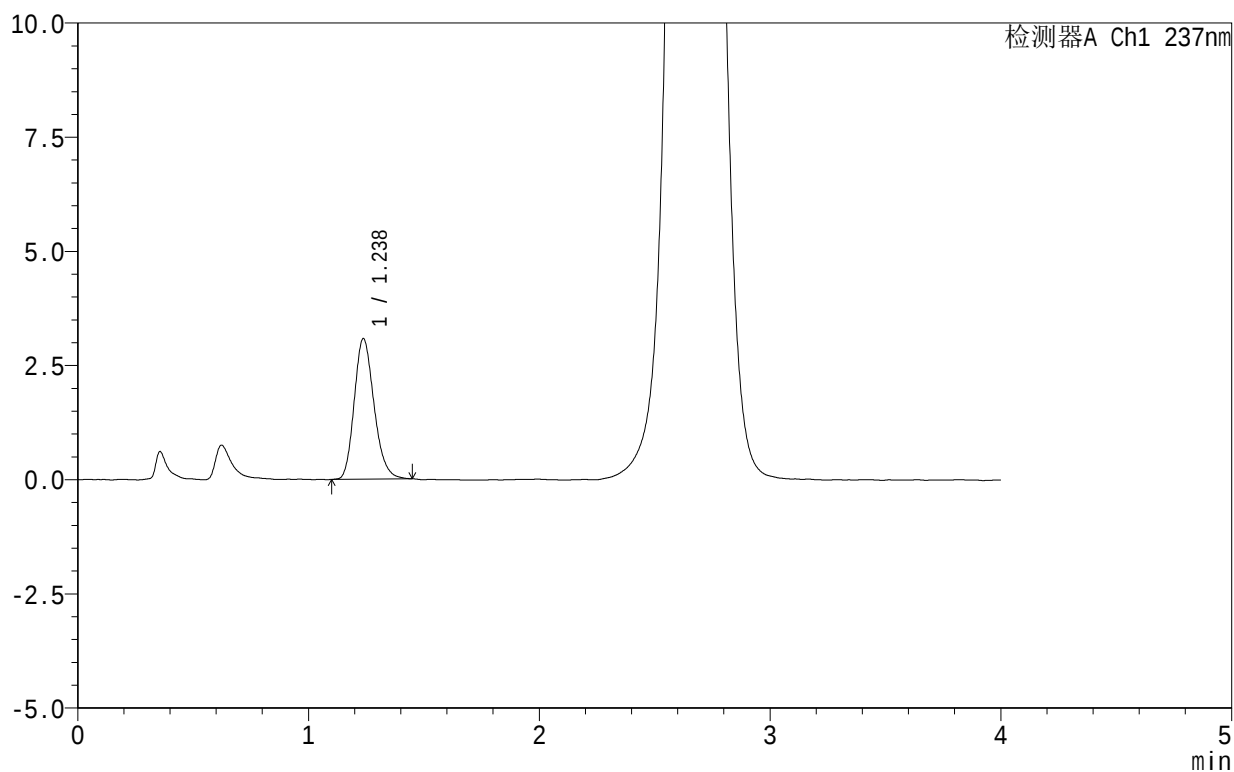

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	18351	100.000	3078	1009	1.204	--
总计		18351	100.000	3078			


图205 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-437-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 06:51:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:48:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

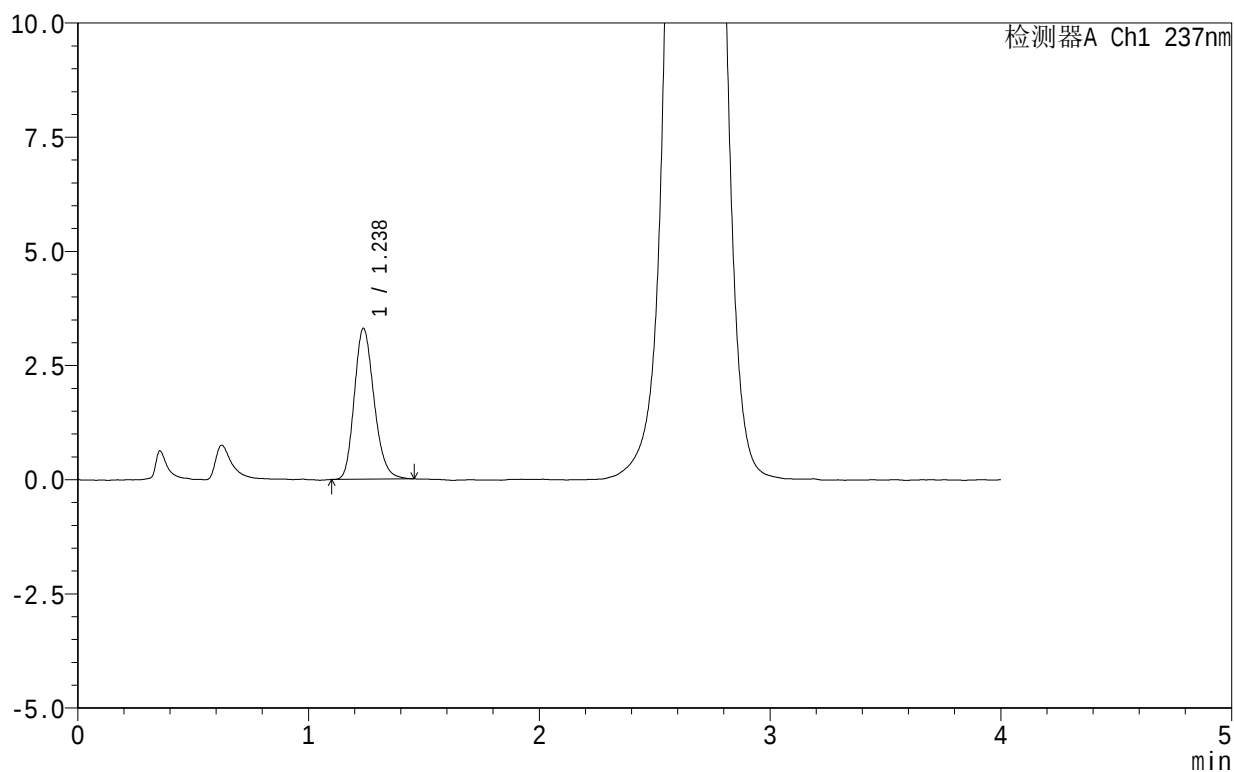

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	19657	100.000	3307	1016	1.202	--
总计		19657	100.000	3307			

图206 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-438-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 06:55:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:48:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

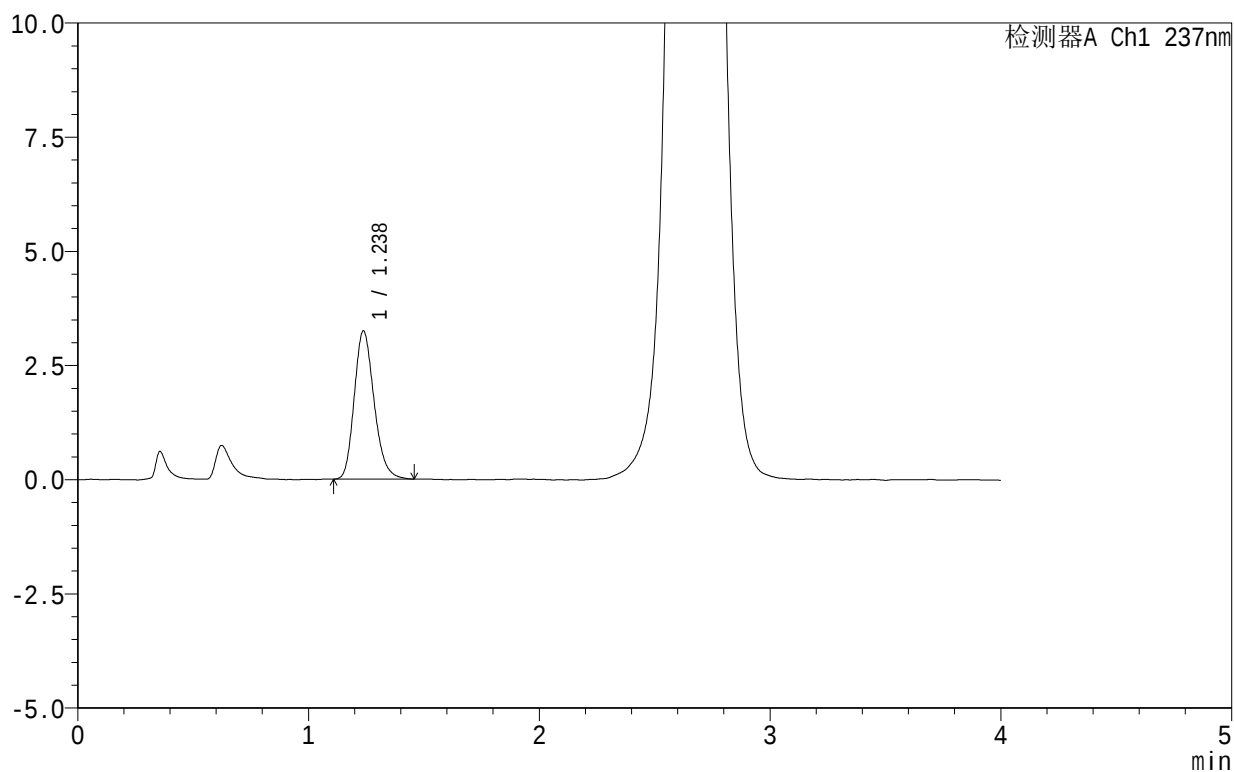

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	19410	100.000	3247	1007	1.211	--
总计		19410	100.000	3247			

图207 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1


207

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-439-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 07:00:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:48:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

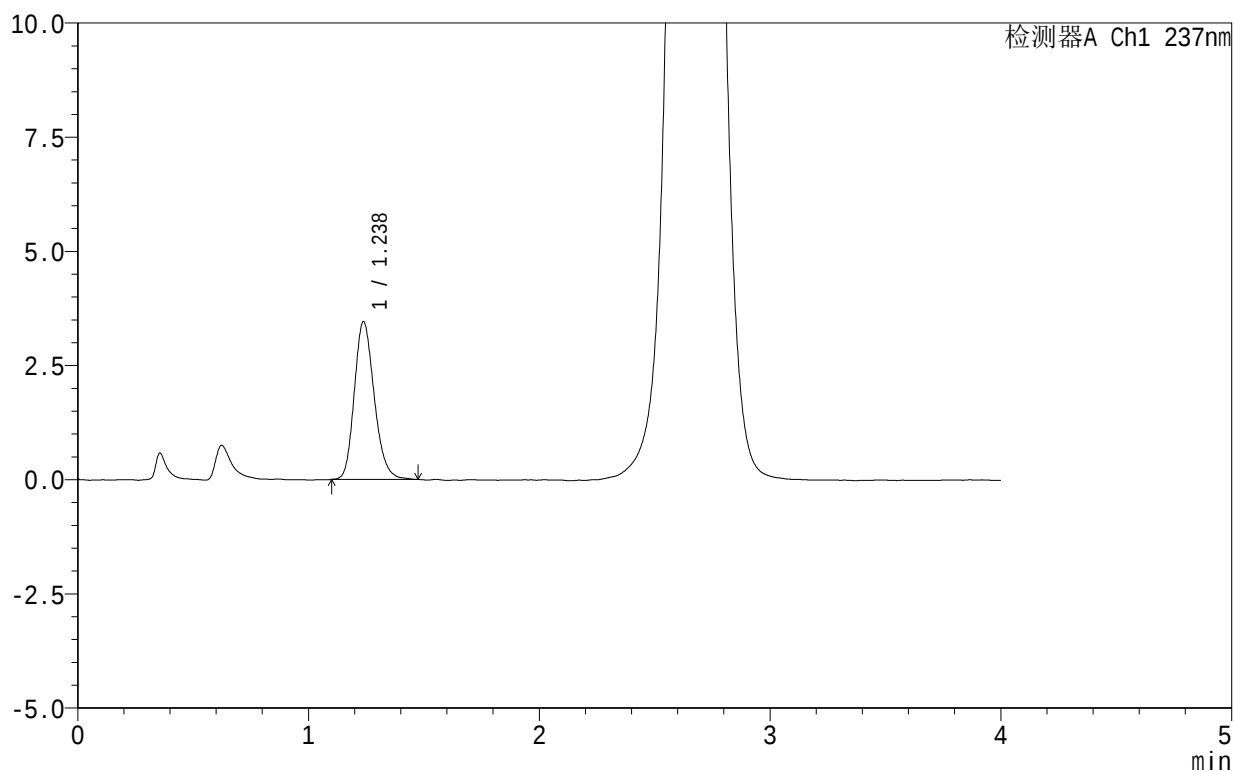

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	20718	100.000	3457	1004	1.201	--
总计		20718	100.000	3457			


图208 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-440-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 07:04:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:48:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

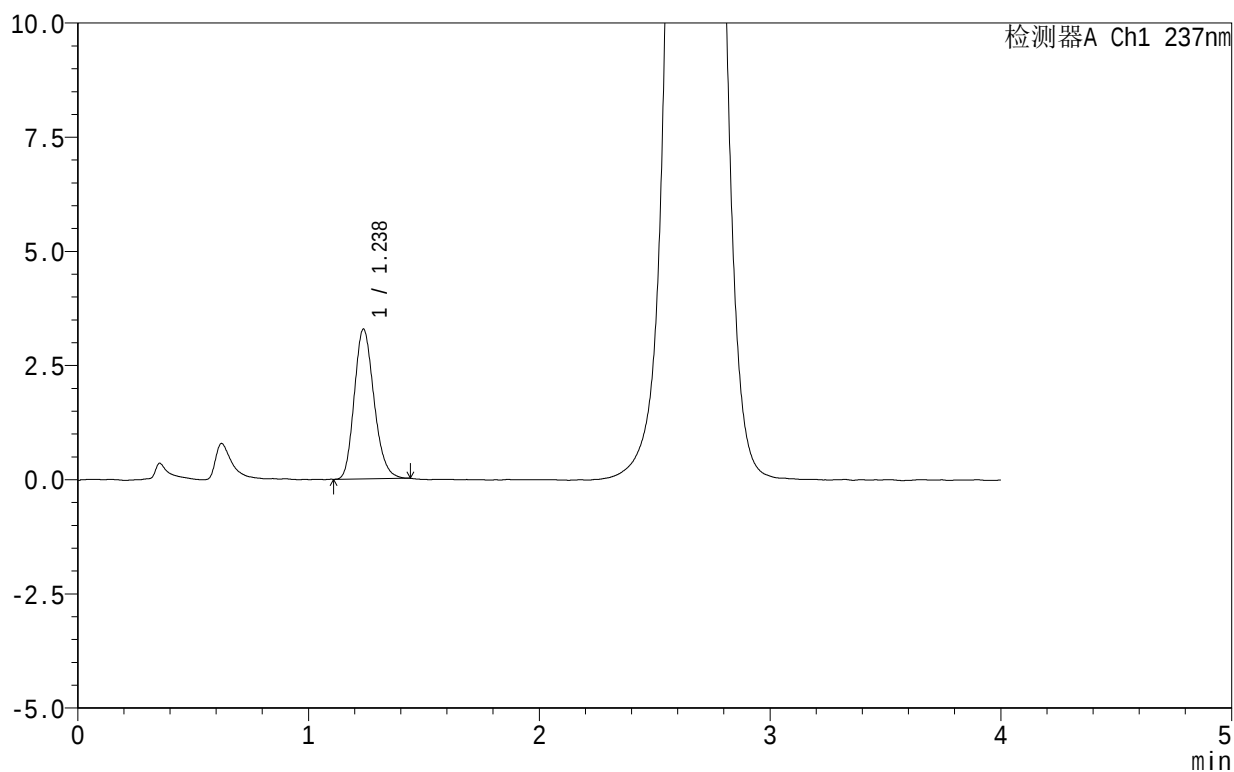

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	19465	100.000	3281	1013	1.195	--
总计		19465	100.000	3281			


图209 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-441-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 07:09:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:49:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

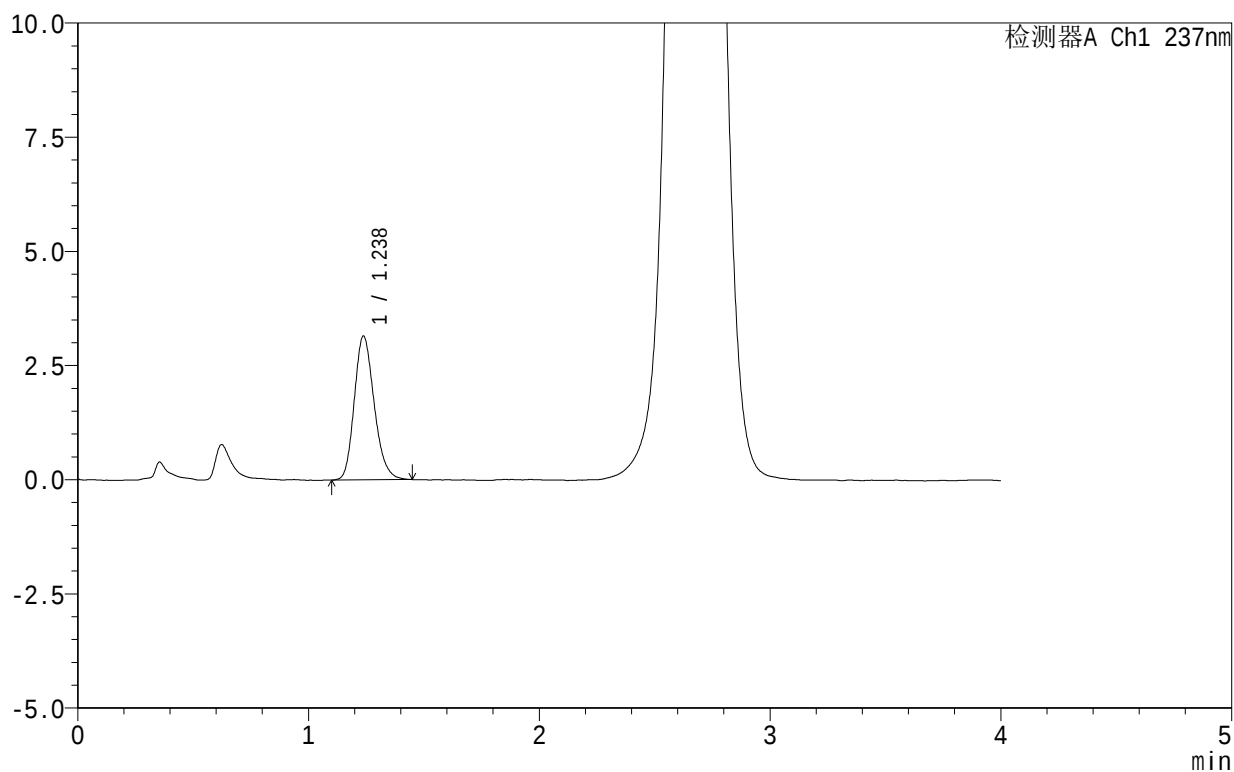

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	18883	100.000	3151	1002	1.205	--
总计		18883	100.000	3151			


图210 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-442-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 07:13:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:49:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

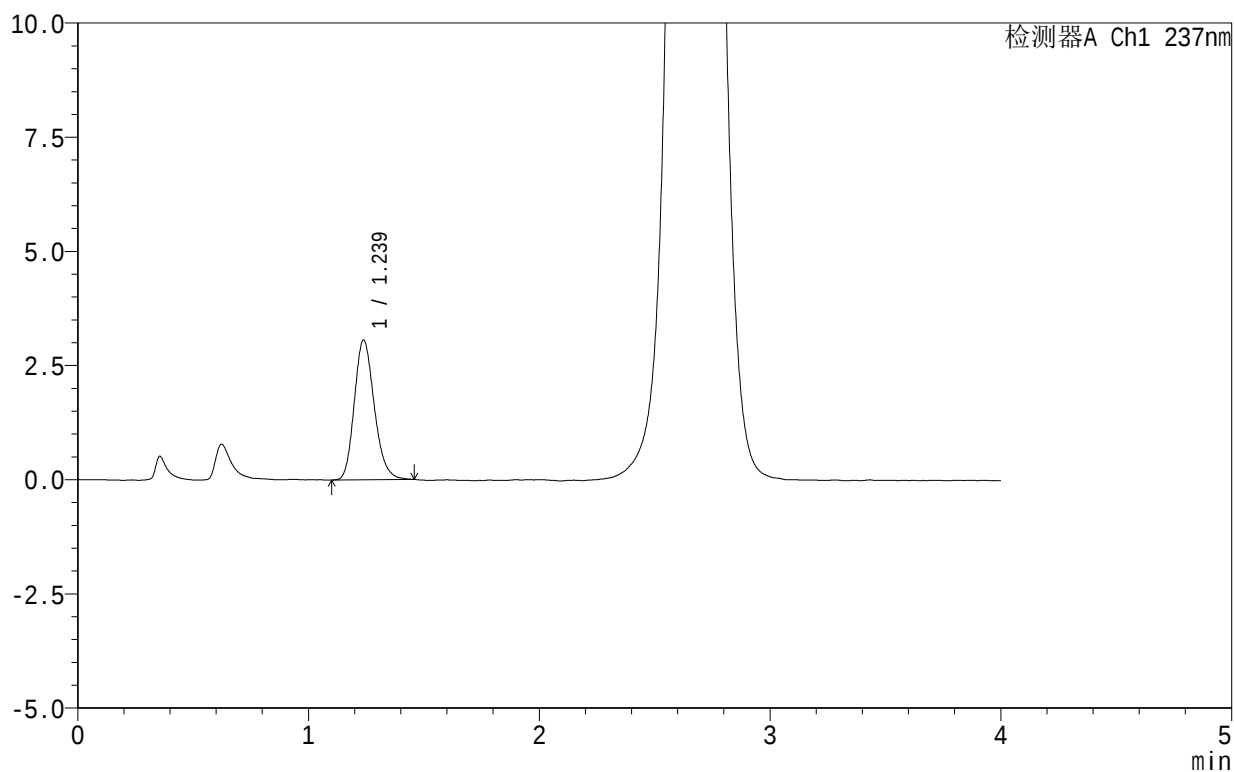

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	18397	100.000	3061	1001	1.196	--
总计		18397	100.000	3061			


图211 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-443-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 07:17:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:49:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

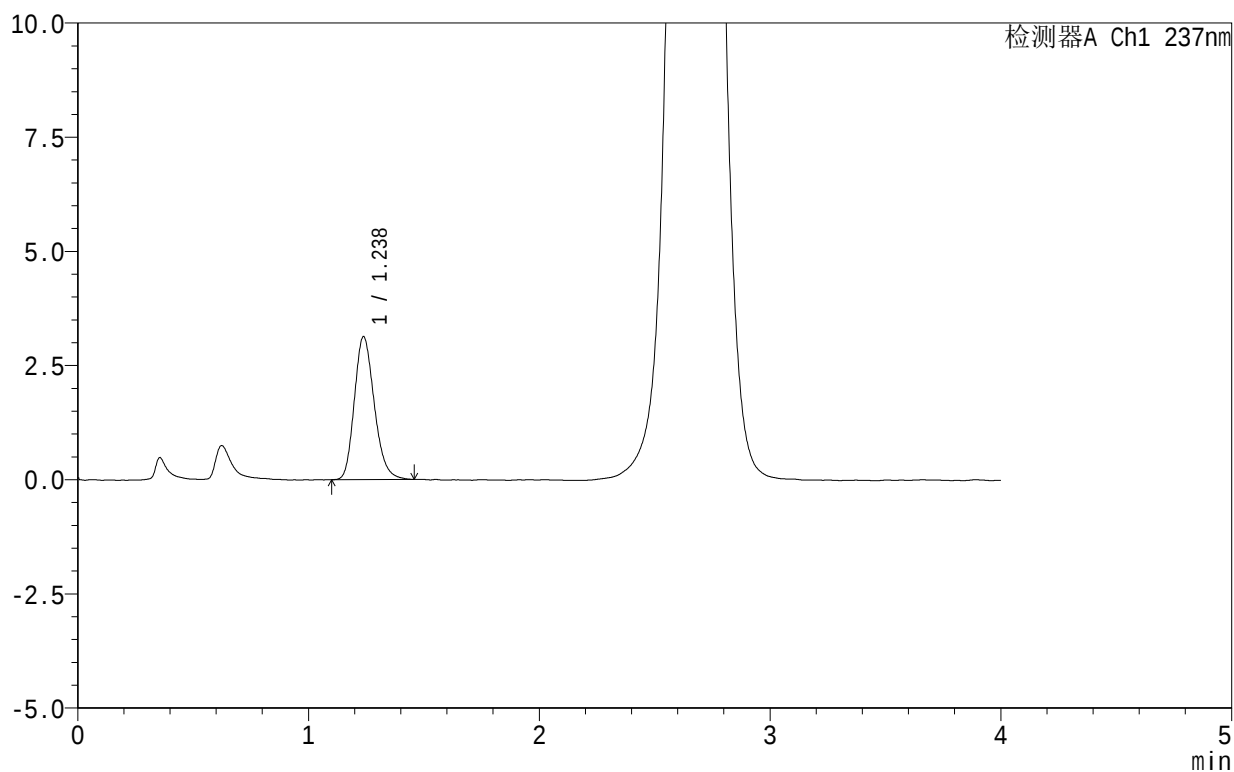

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	18807	100.000	3132	995	1.210	--
总计		18807	100.000	3132			

图212 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-444-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 07:22:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:49:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

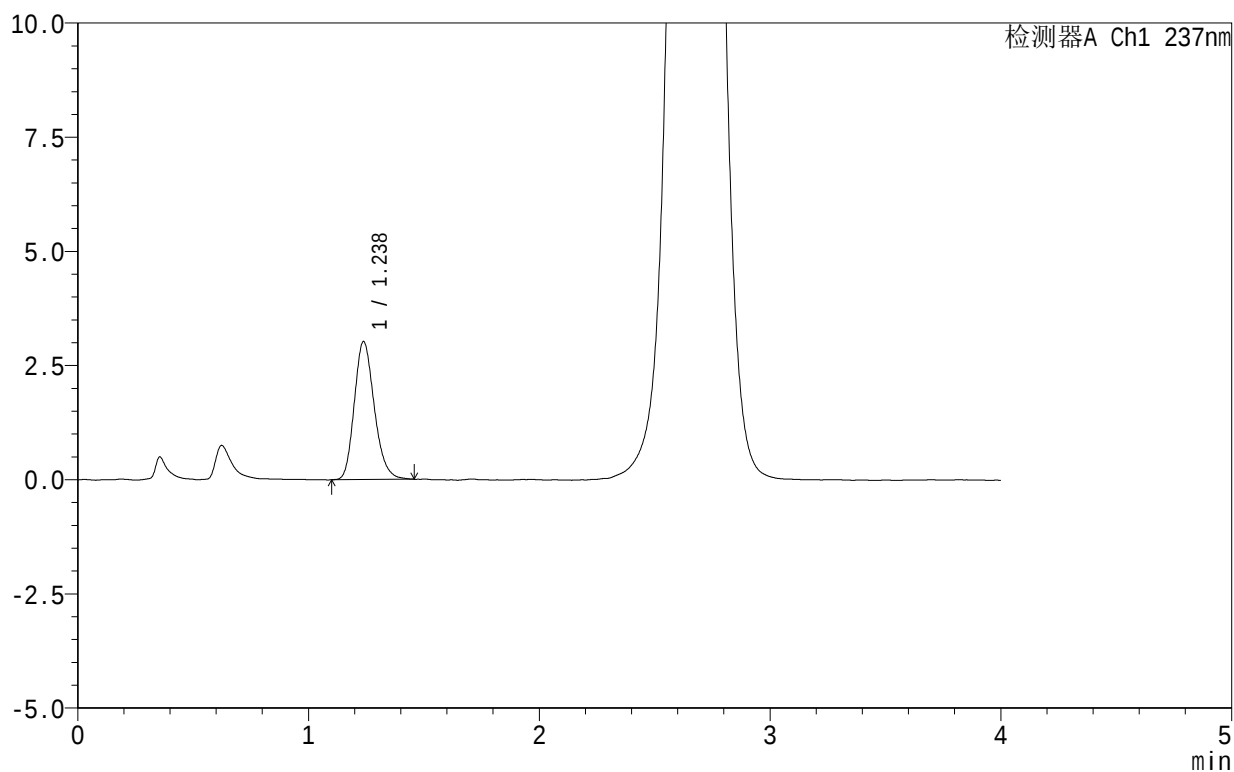

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	18197	100.000	3024	992	1.206	--
总计		18197	100.000	3024			

图213 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1


213

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-445-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 07:26:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:49:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

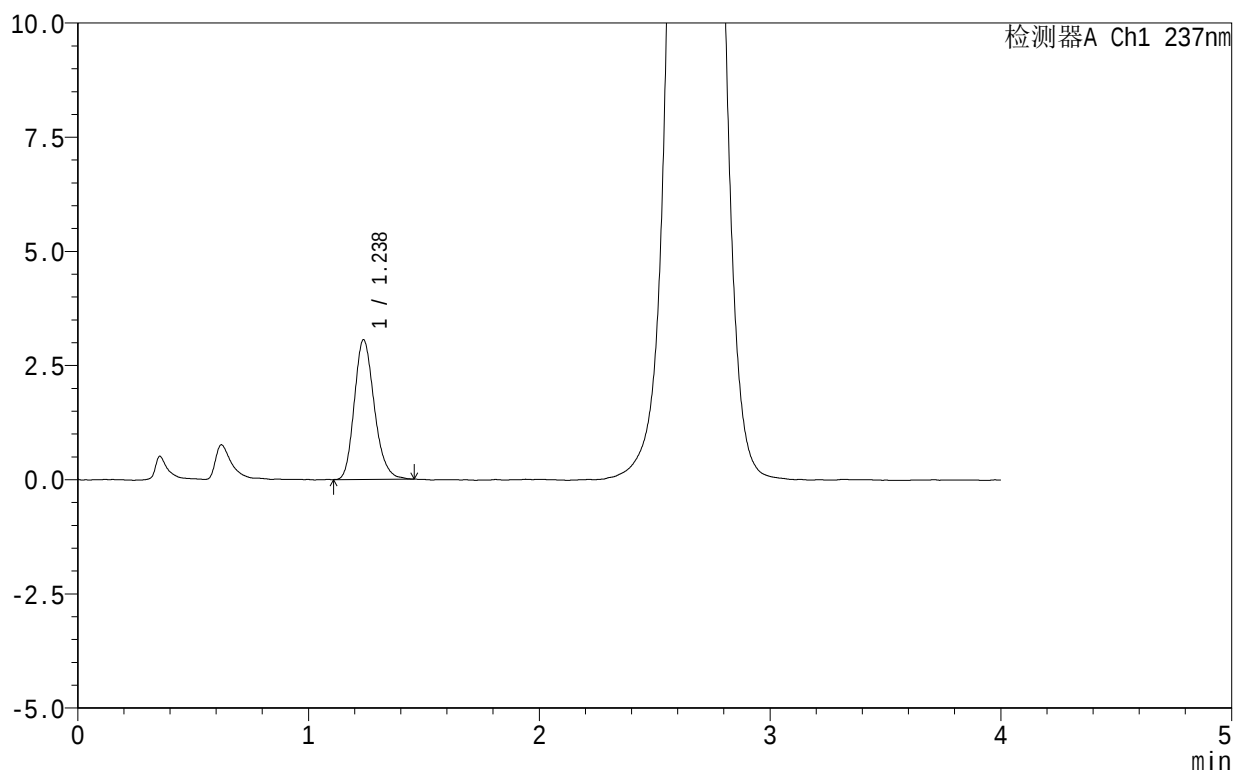

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	18400	100.000	3058	1001	1.207	--
总计		18400	100.000	3058			


图214 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-446-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 07:31:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:49:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

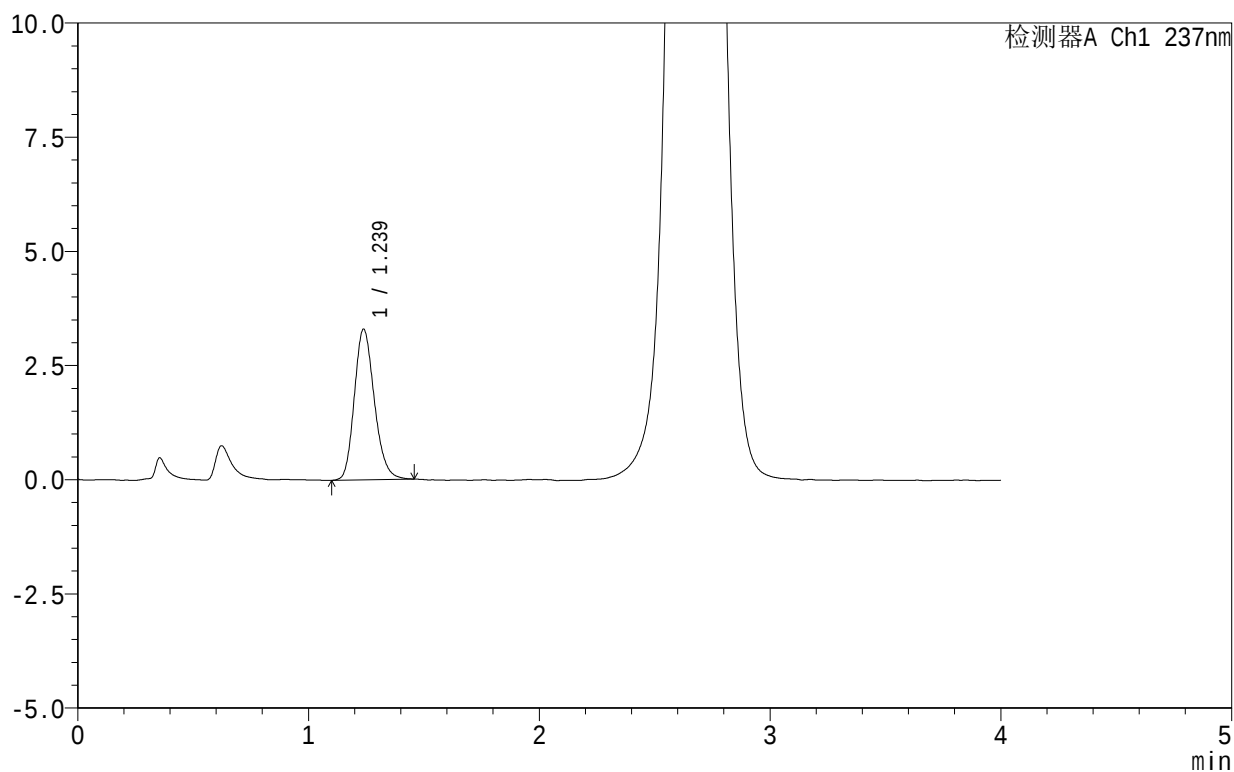

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	19885	100.000	3301	996	1.197	--
总计		19885	100.000	3301			


图215 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-447-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 07:35:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:49:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

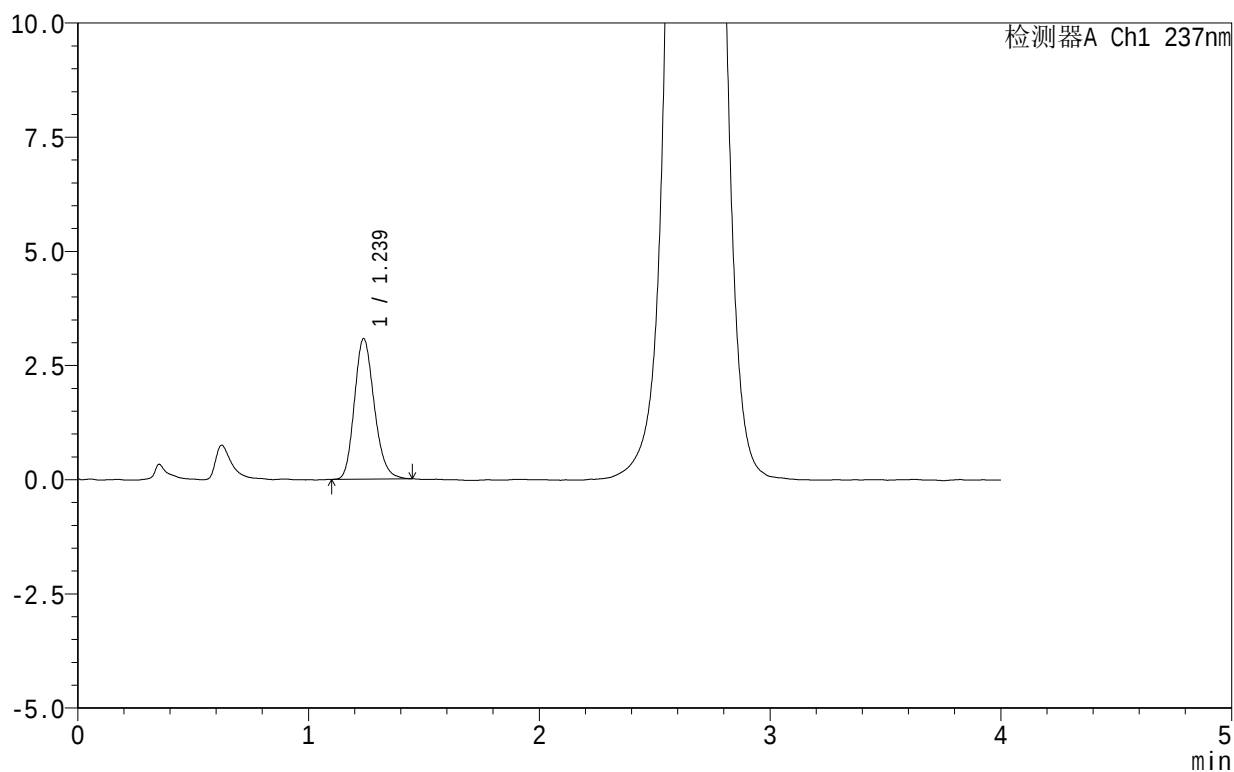

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	18354	100.000	3077	1009	1.189	--
总计		18354	100.000	3077			


图216 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-448-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 07:39:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:49:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

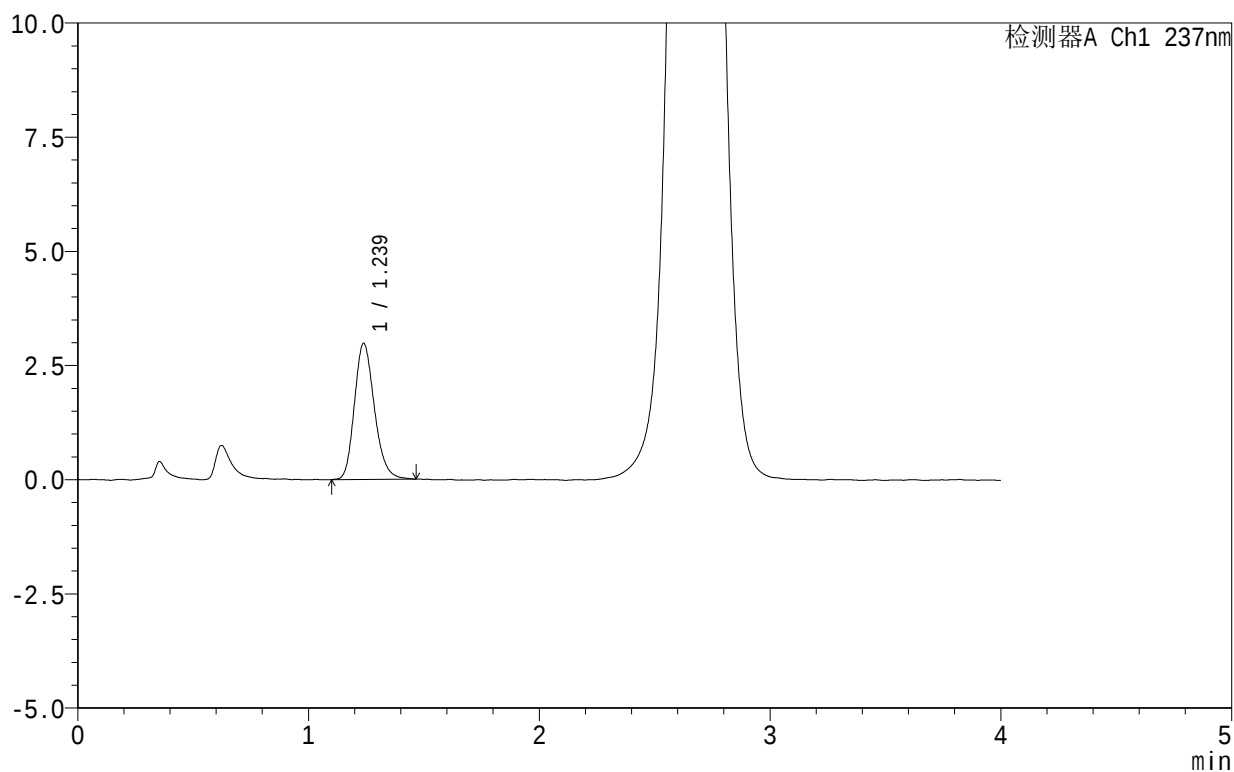

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	17936	100.000	2980	999	1.207	--
总计		17936	100.000	2980			

图217 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-449-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 07:44:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:49:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

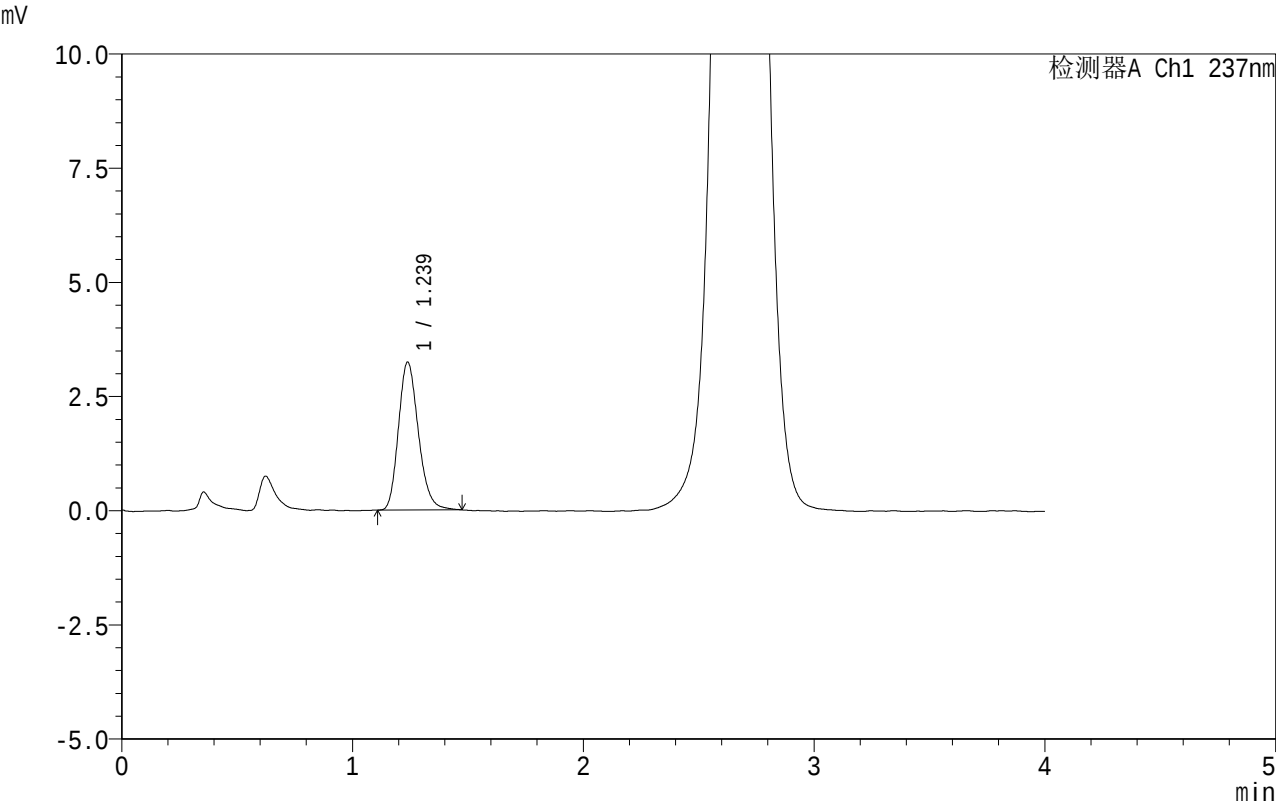

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	19462	100.000	3242	1002	1.205	--
总计		19462	100.000	3242			


图218 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-450-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 07:48:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:49:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

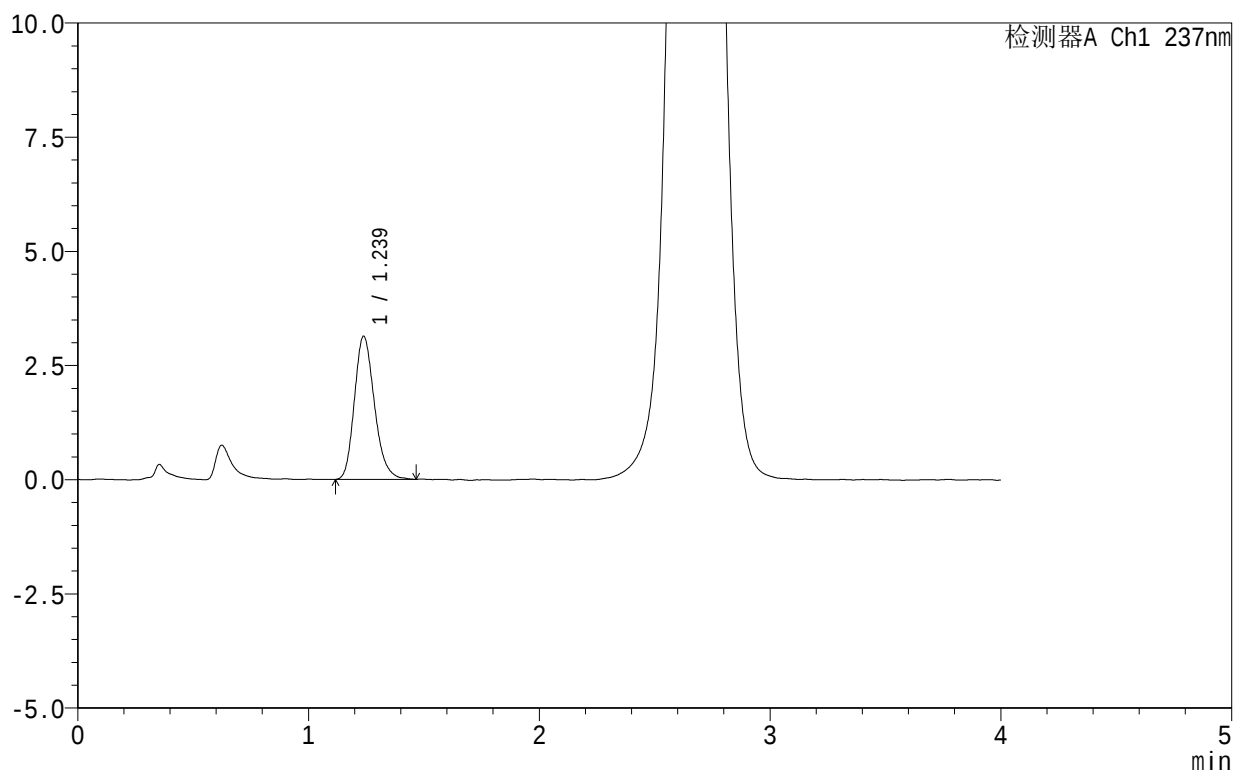

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	18909	100.000	3138	989	1.213	--
总计		18909	100.000	3138			

图219 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-451-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 07:53:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:49:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

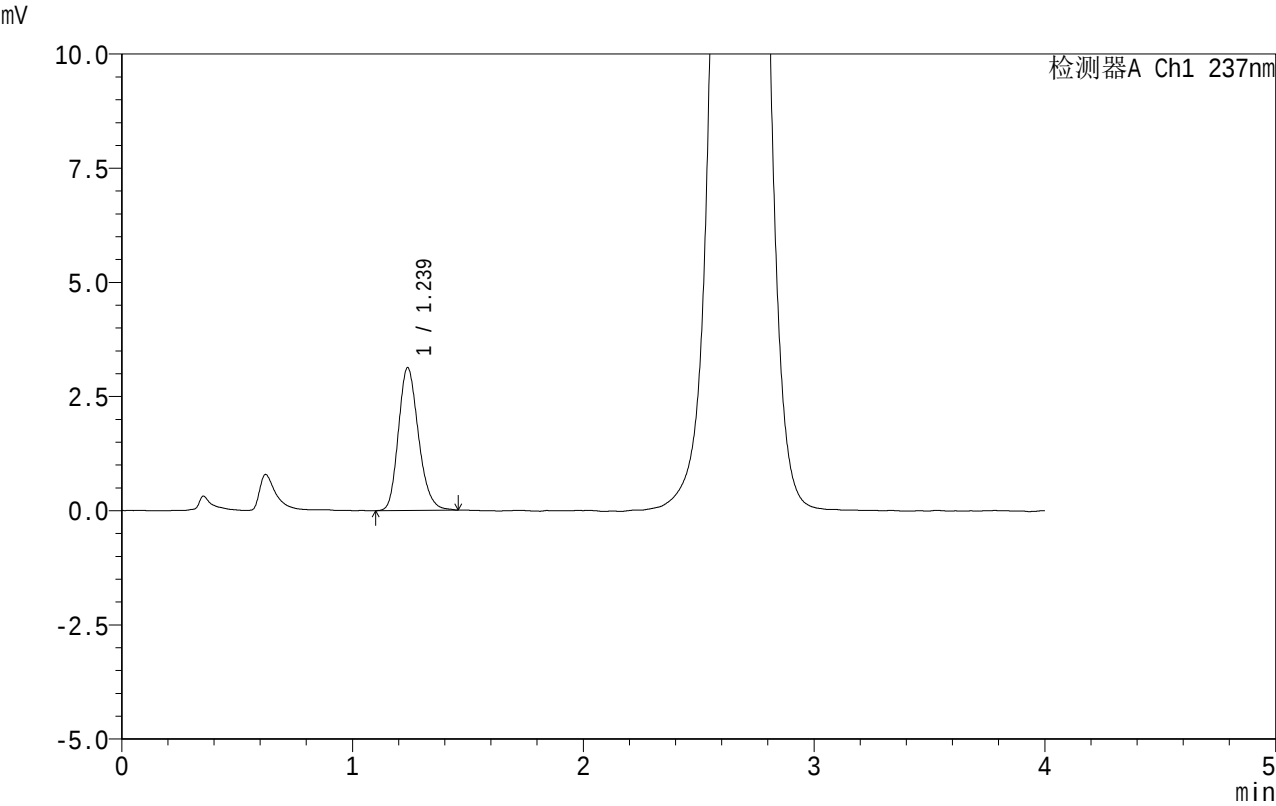

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	18925	100.000	3128	985	1.210	--
总计		18925	100.000	3128			

图220 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-452-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 07:57:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:49:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

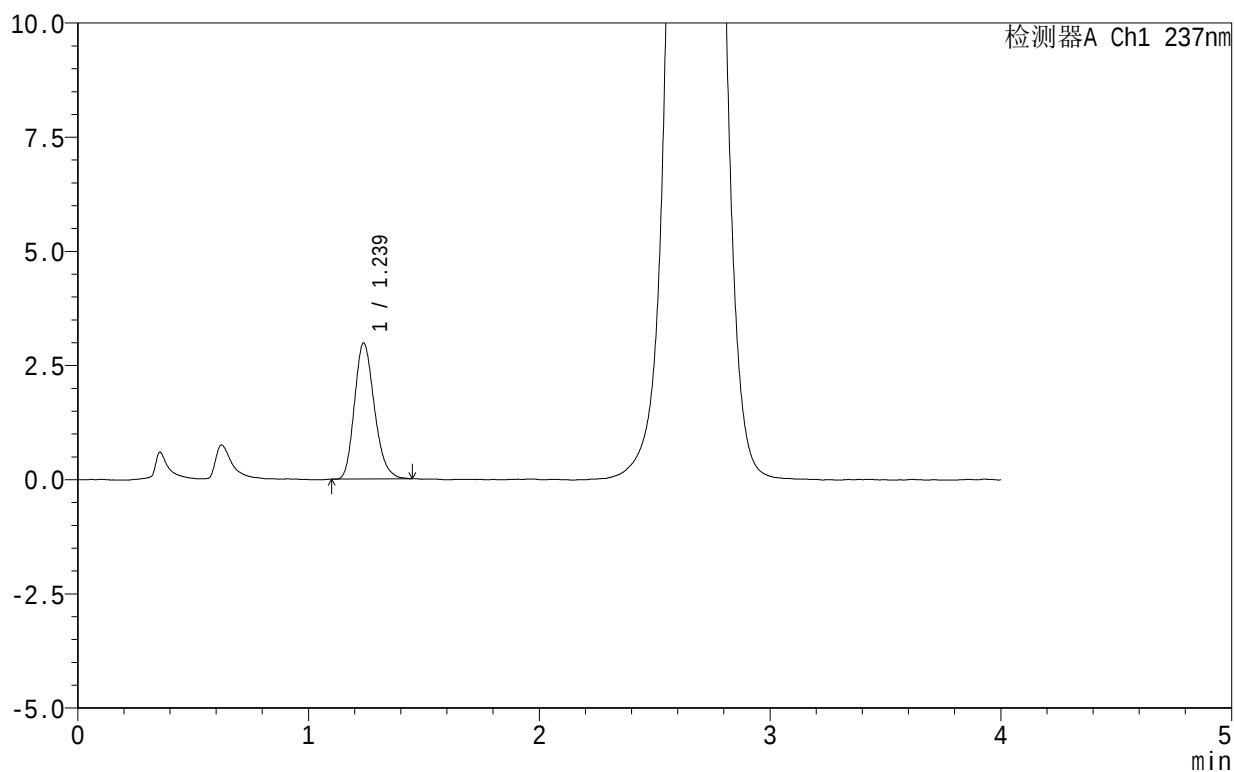

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	17861	100.000	2982	996	1.211	--
总计		17861	100.000	2982			

图221 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

221




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-453-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 08:01:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 11:49:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

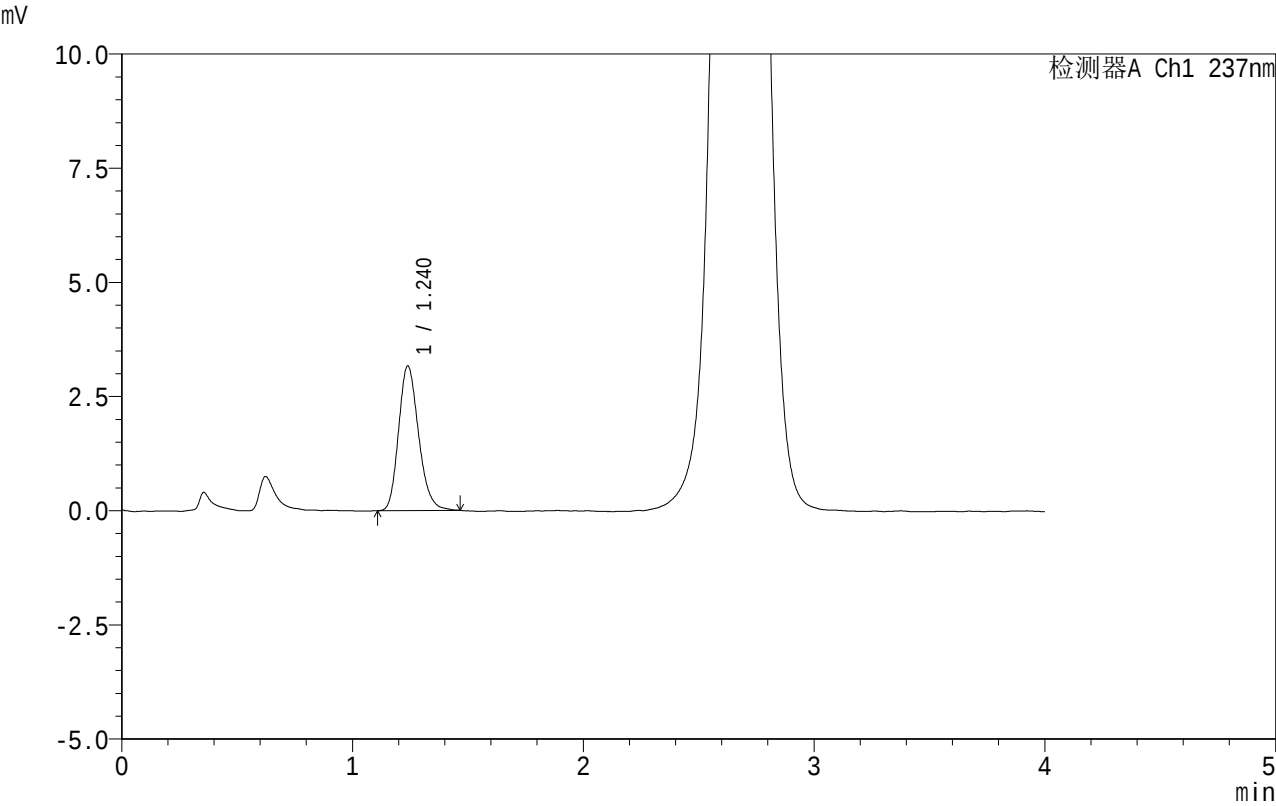

<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	19092	100.000	3168	993	1.204	--
总计		19092	100.000	3168			


图222 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-454-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 08:06:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:49:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

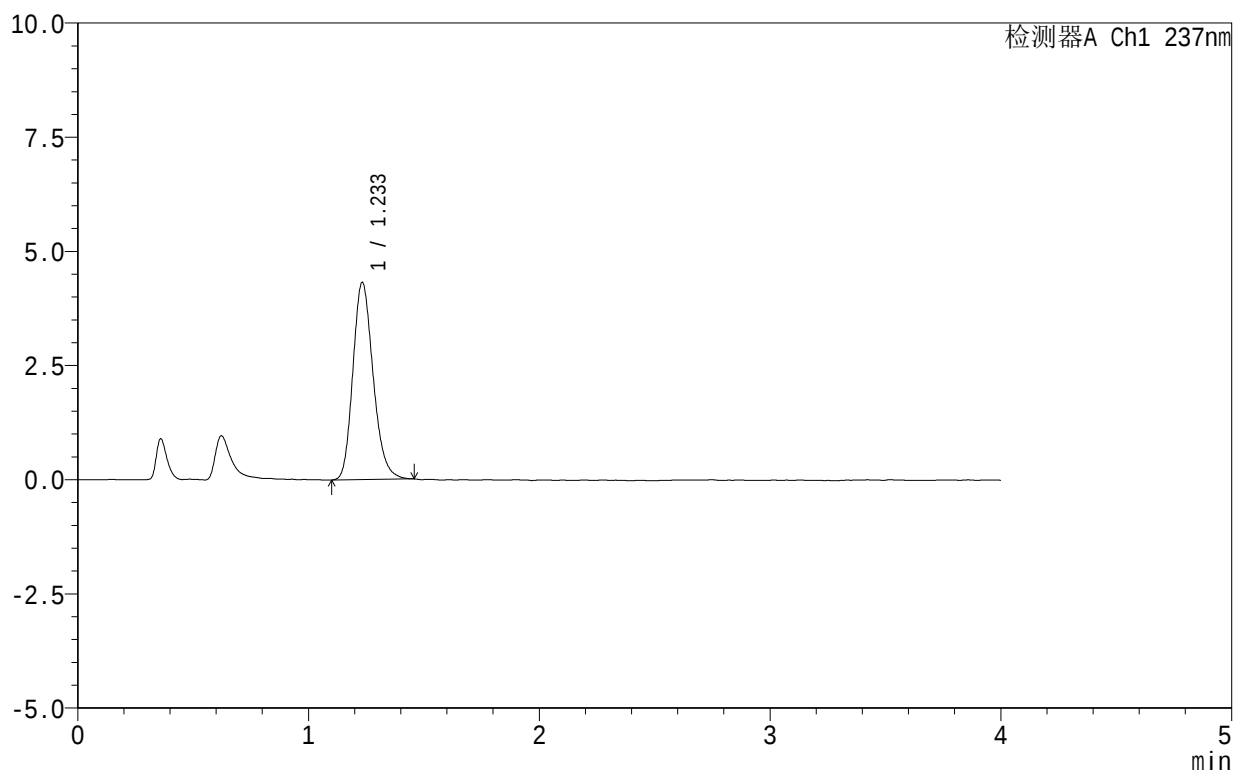

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	26340	100.000	4308	961	1.203	--
总计		26340	100.000	4308			


图223 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-68/11-455-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH6.8-2-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 08:10:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:49:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

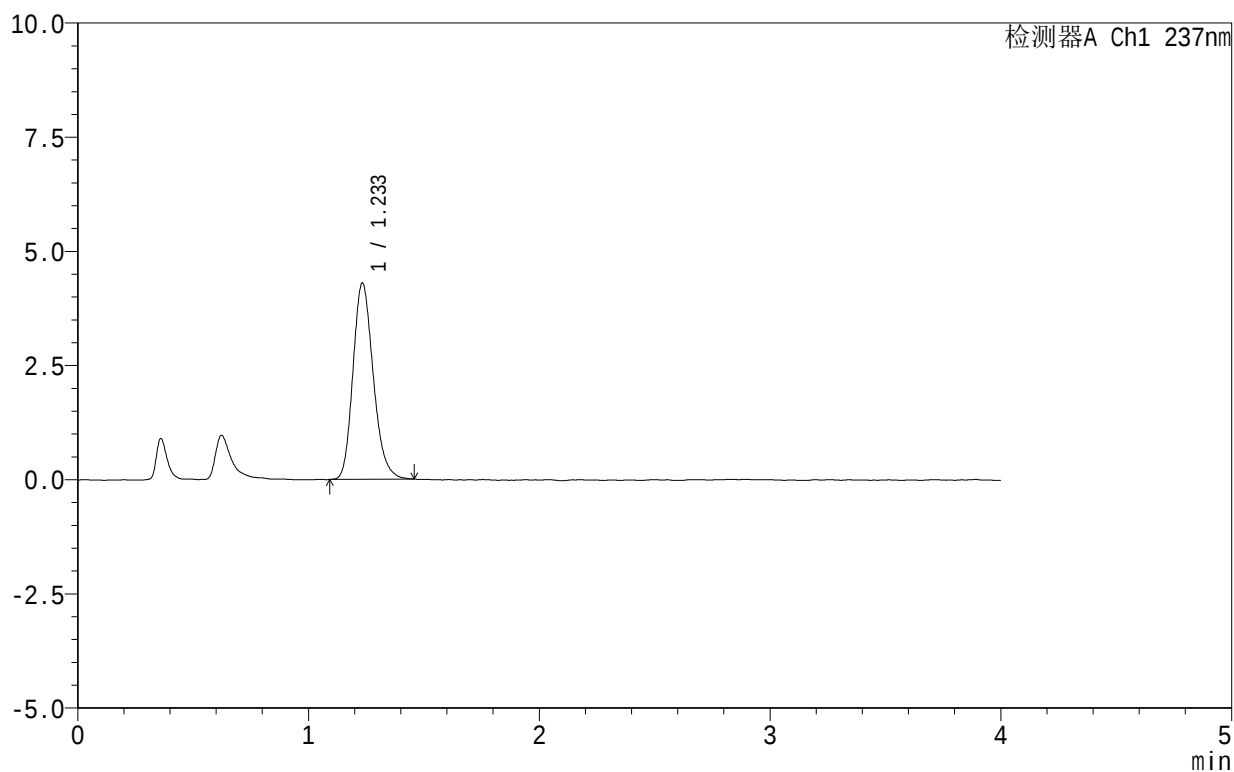

<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	26245	100.000	4284	957	1.204	--
总计		26245	100.000	4284			

图224 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2