




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 11-5/11-341-1 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 11:33:41
处理时间 (V1): 2025/01/15 11:38:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

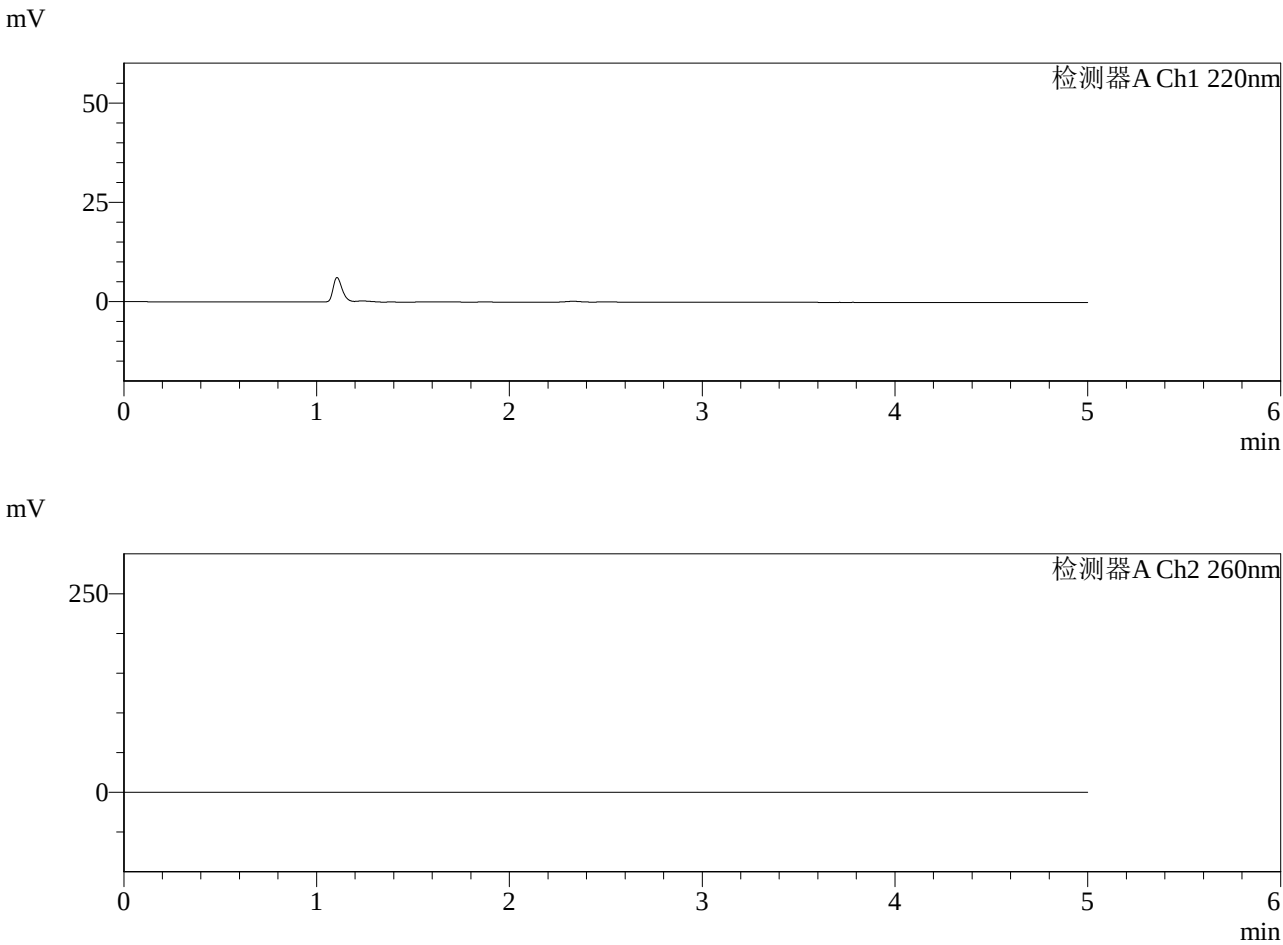

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-342-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 11:41:30
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:14:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

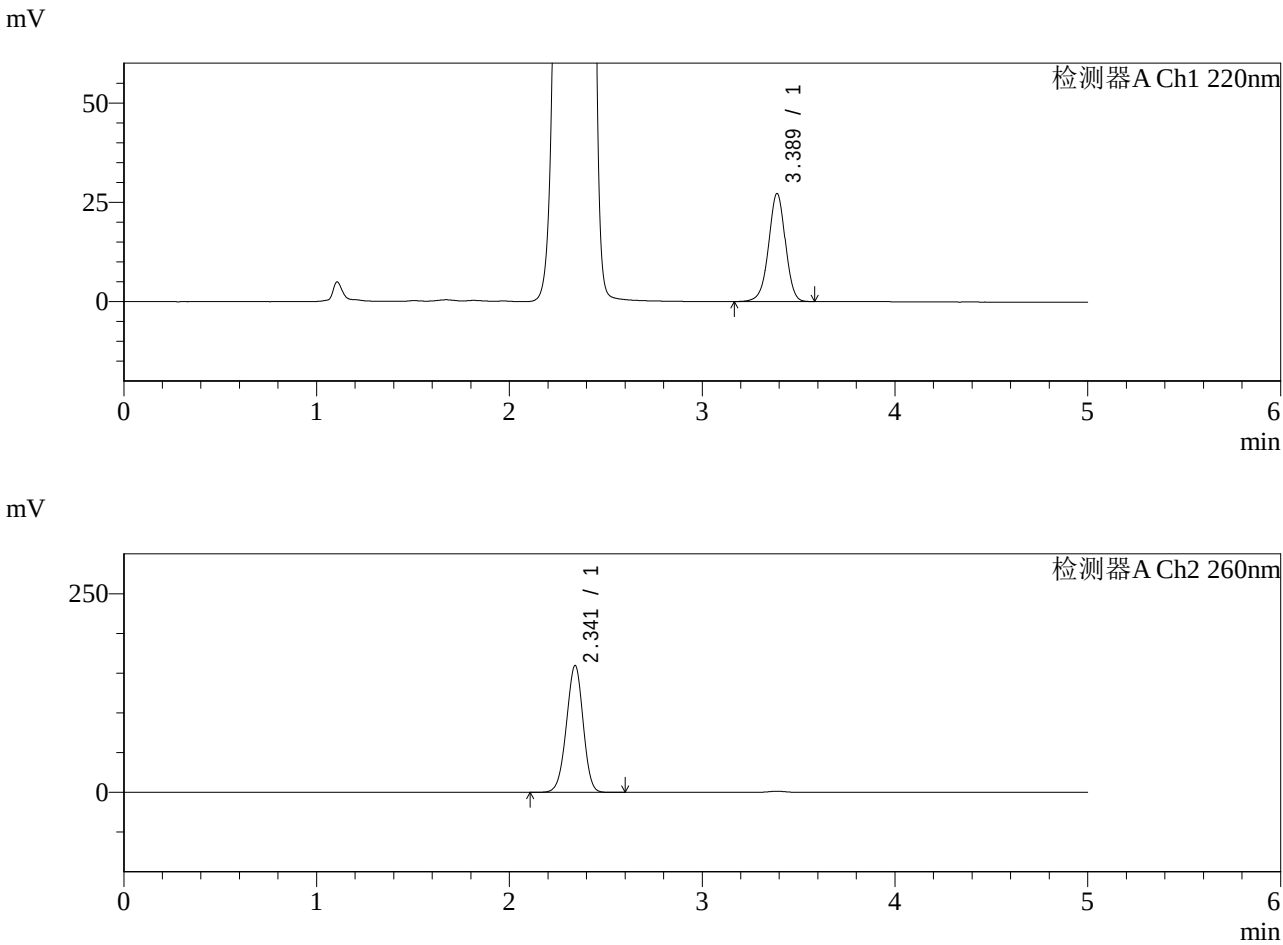

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.389	164308	100.000	27210	7422	0.972	--
总计		164308	100.000	27210			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	964934	100.000	159404	3446	0.968	--
总计		964934	100.000	159404			

图2 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-343-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 11:46:54
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:14:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

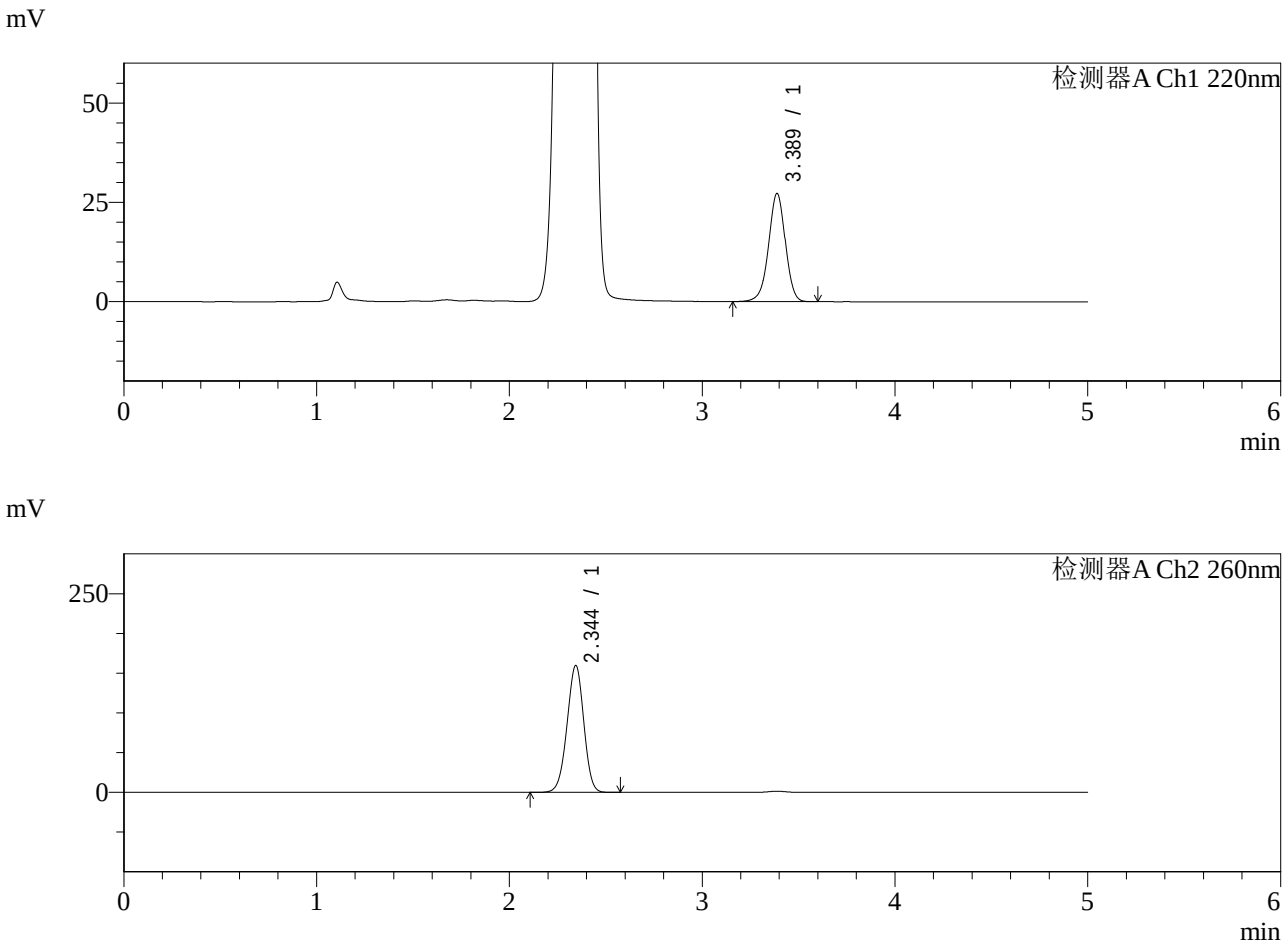

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.389	164435	100.000	27229	7431	0.970	--
总计		164435	100.000	27229			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.344	966221	100.000	159400	3448	0.967	--
总计		966221	100.000	159400			

图3 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-344-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 11:52:17
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:14:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

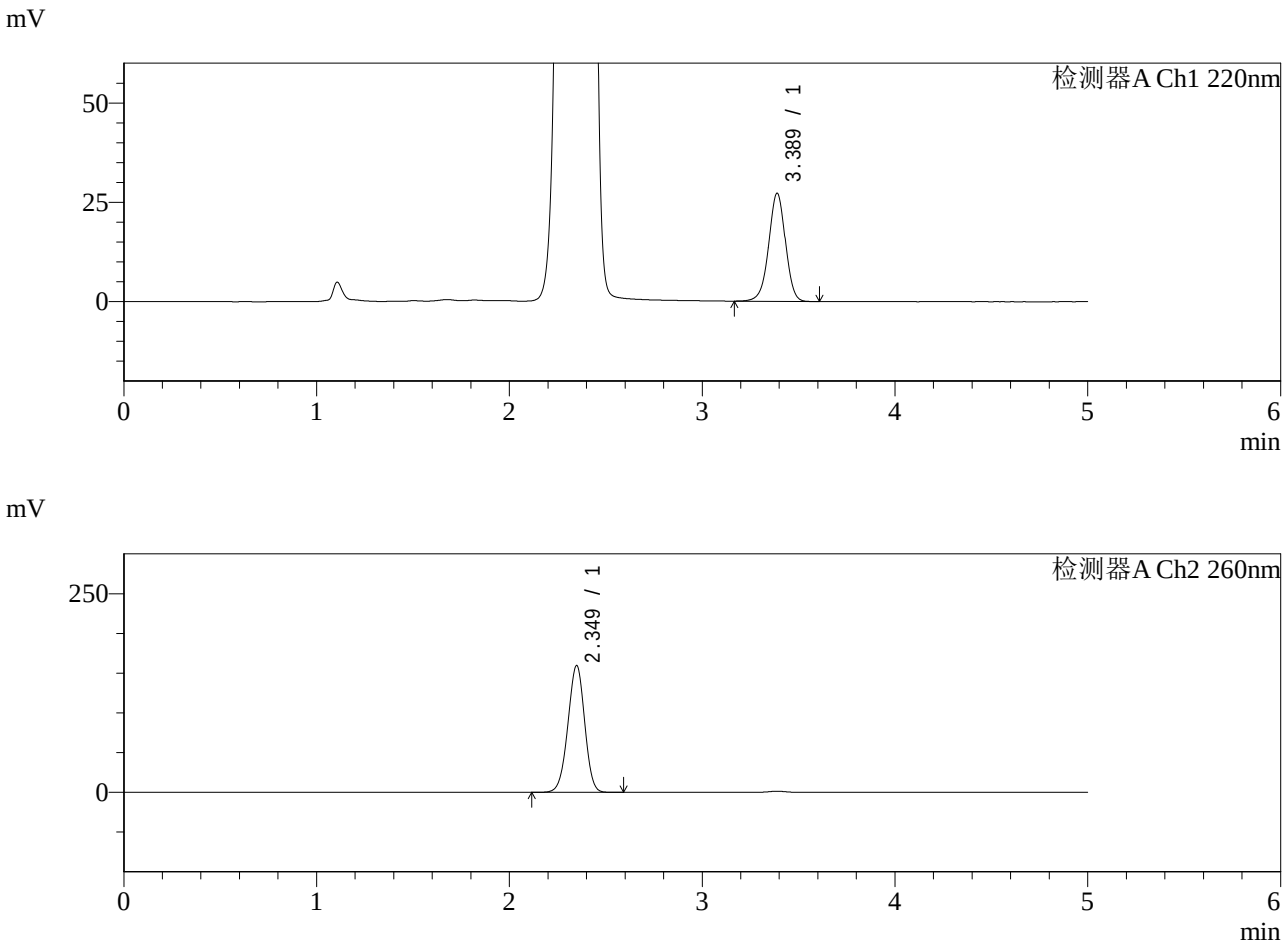

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.389	164299	100.000	27218	7431	0.972	--
总计		164299	100.000	27218			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	967901	100.000	159477	3447	0.968	--
总计		967901	100.000	159477			

图4 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-345-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 11:57:40
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:14:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

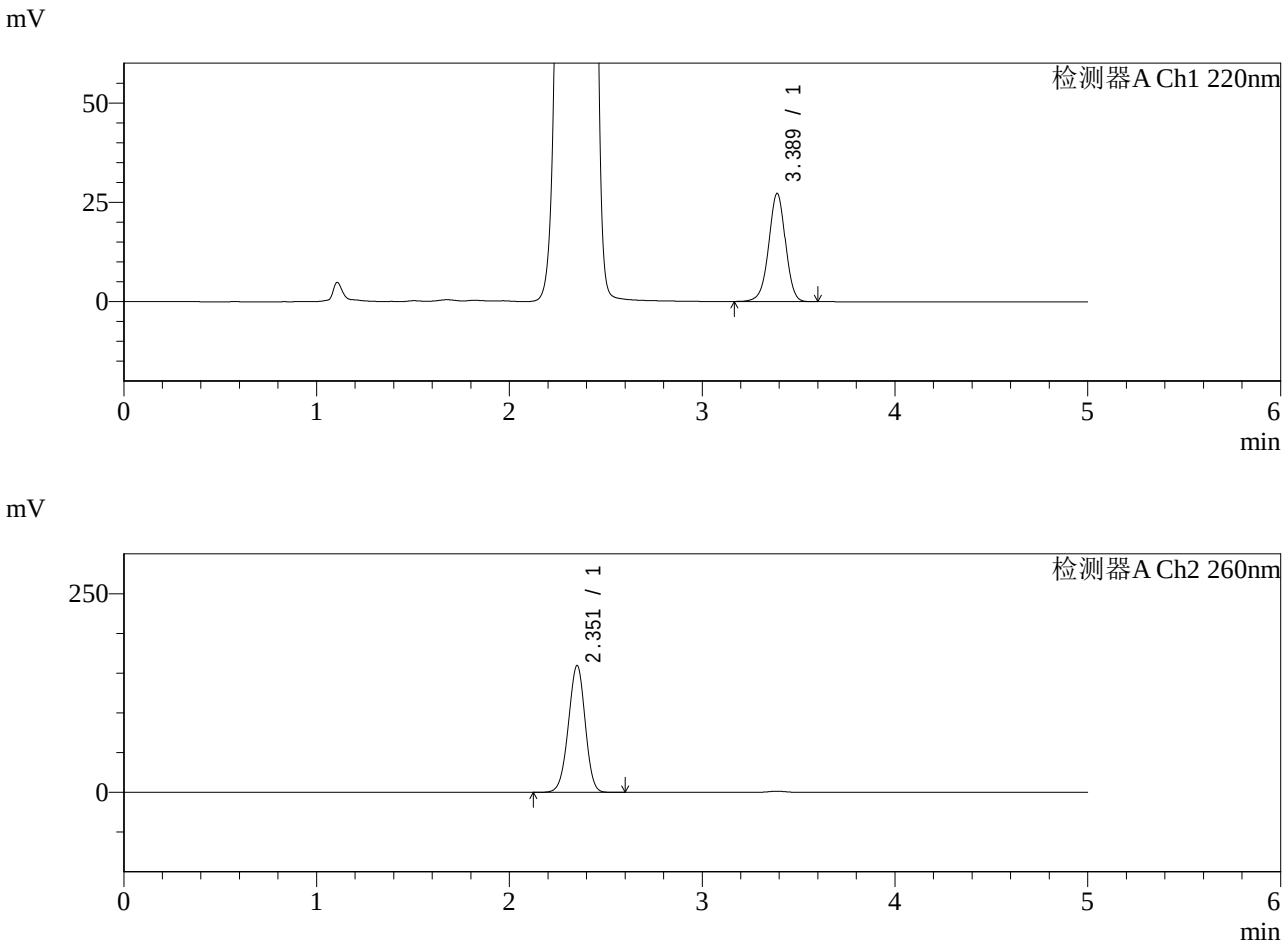

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.389	164172	100.000	27214	7441	0.972	--
总计		164172	100.000	27214			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	969021	100.000	158978	3450	0.968	--
总计		969021	100.000	158978			

图5 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-346-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 12:03:04
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:14:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

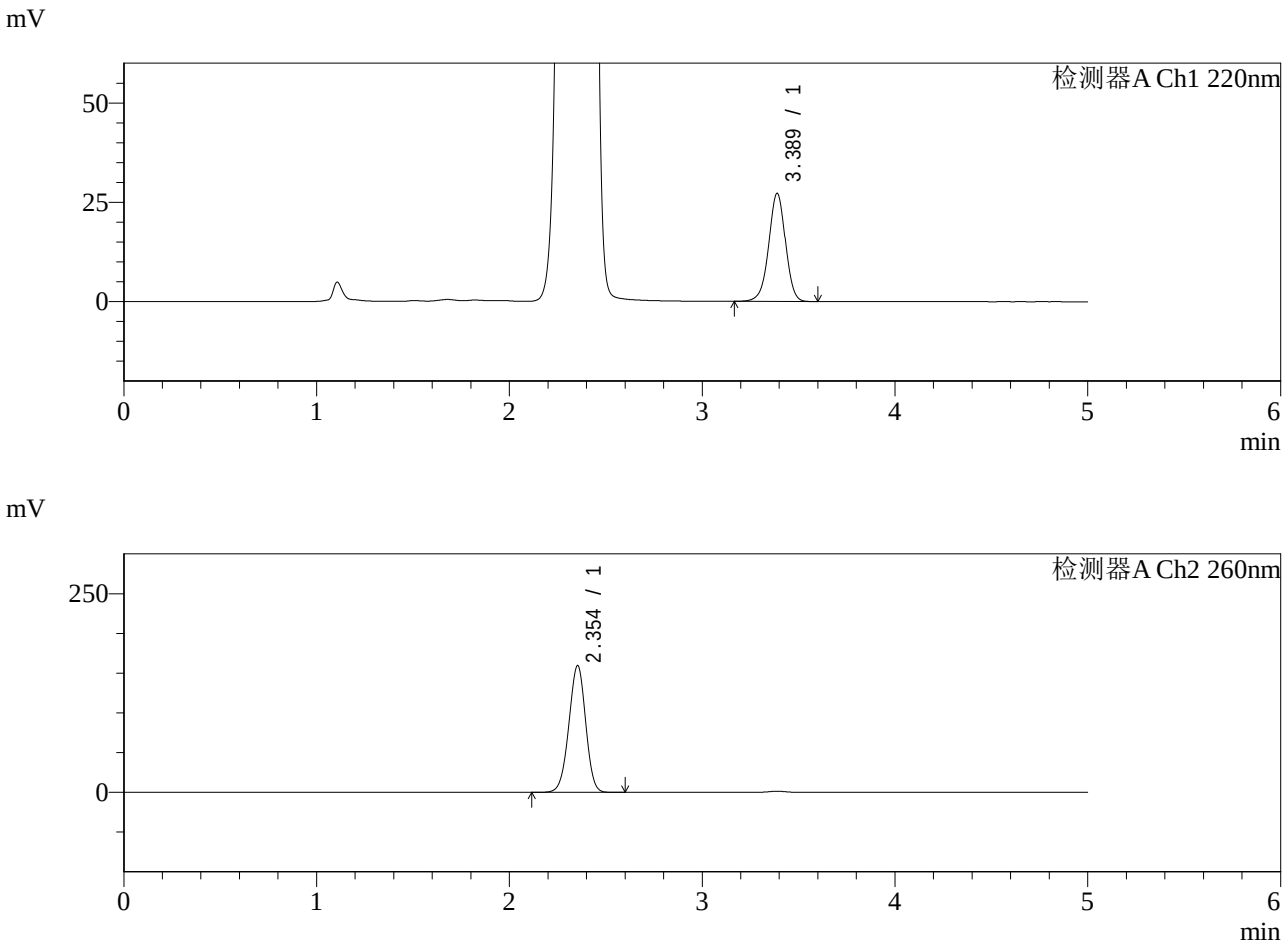

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.389	164360	100.000	27231	7444	0.972	--
总计		164360	100.000	27231			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	969240	100.000	159508	3450	0.968	--
总计		969240	100.000	159508			

图6 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-347-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 12:08:26
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:14:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

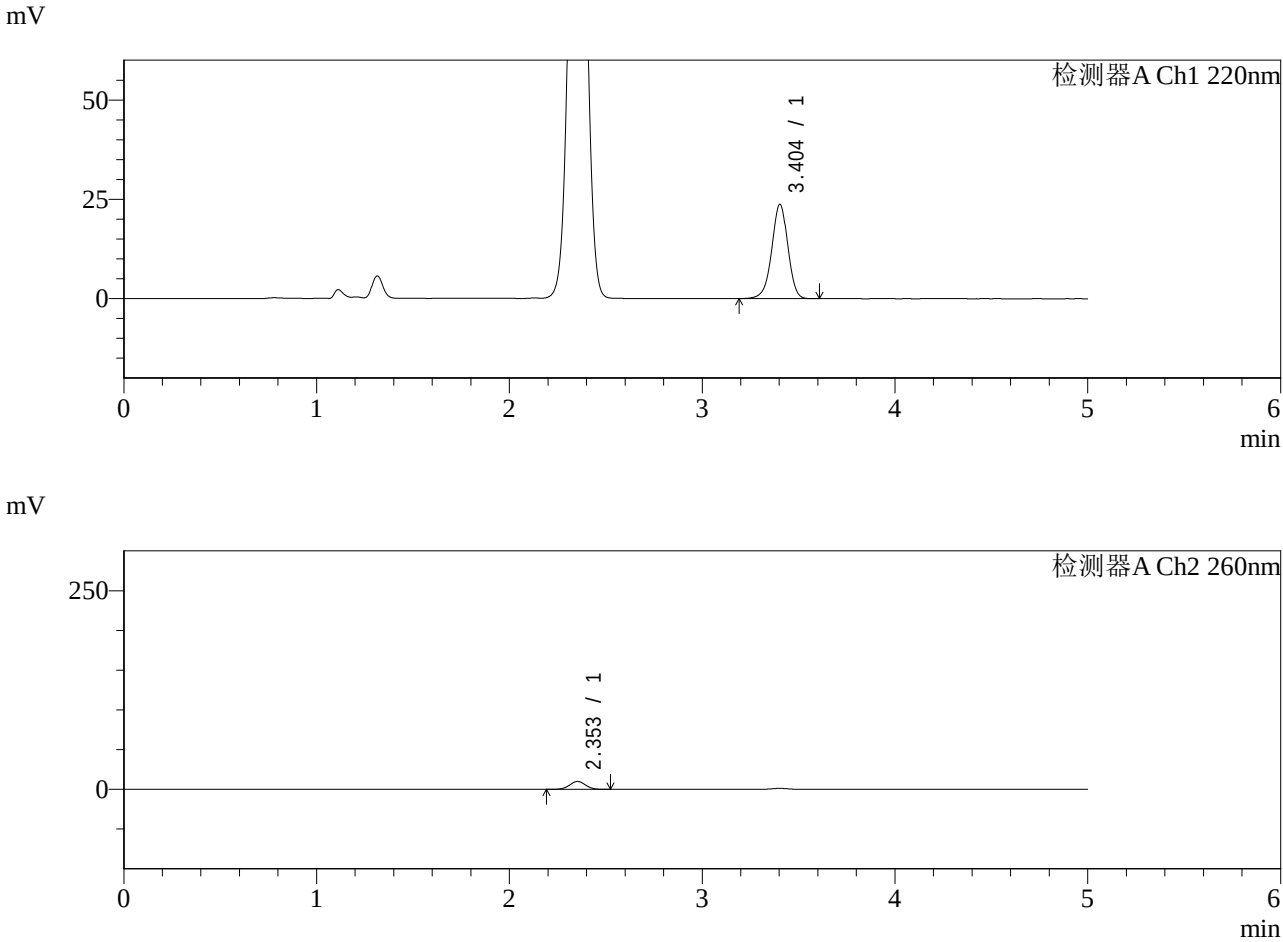

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.404	137473	100.000	23754	8175	0.960	--
总计		137473	100.000	23754			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	57823	100.000	9978	3798	1.017	--
总计		57823	100.000	9978			

图7 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-348-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 12:13:49
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

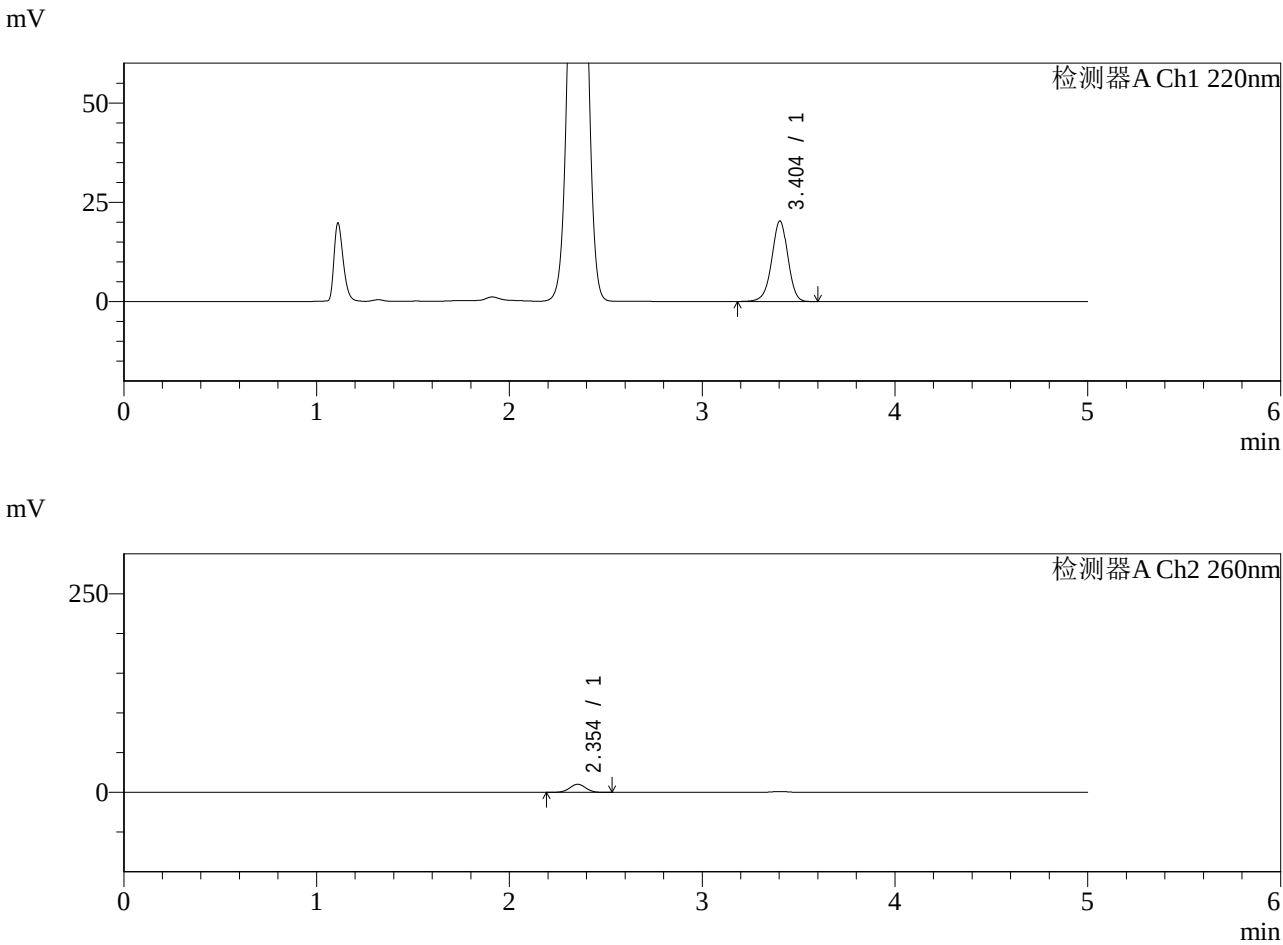

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.404	117481	100.000	20272	8158	0.960	--
总计		117481	100.000	20272			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	59070	100.000	10215	3804	1.016	--
总计		59070	100.000	10215			

图8 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-349-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 12:19:11
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

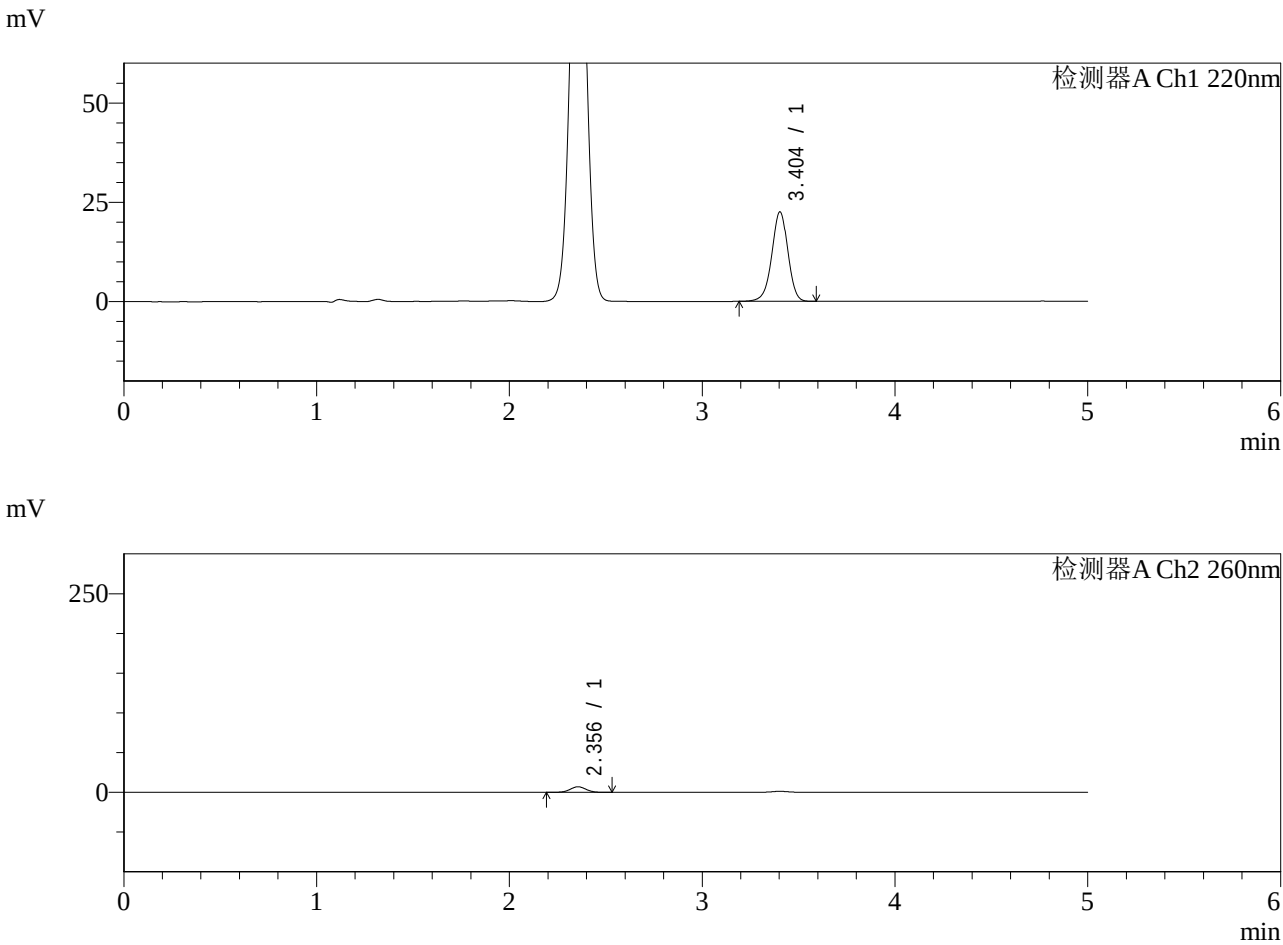

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.404	130232	100.000	22527	8191	0.961	--
总计		130232	100.000	22527			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	40355	100.000	6994	3847	1.019	--
总计		40355	100.000	6994			

图9 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-350-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 12:24:33
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

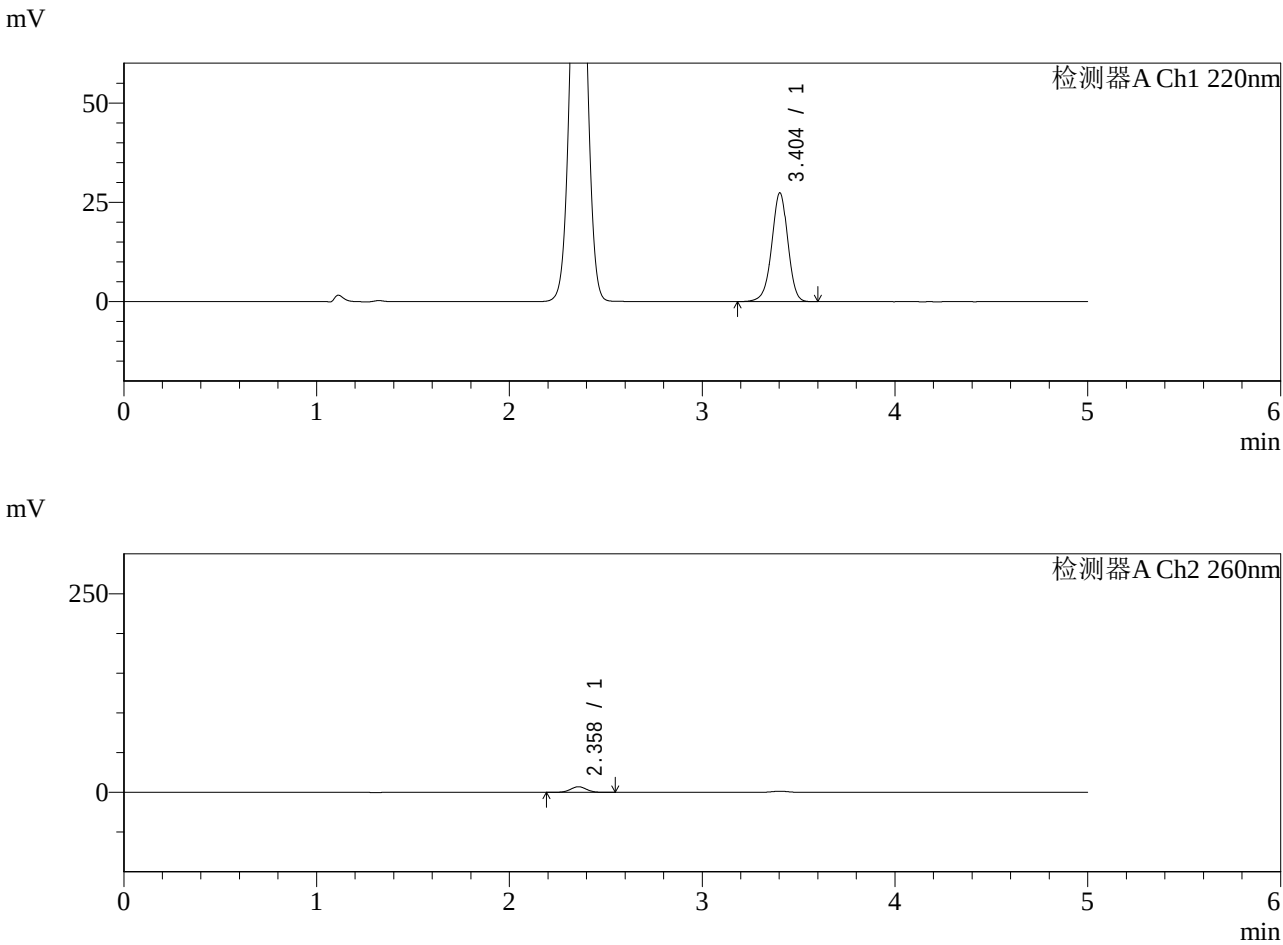

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.404	158550	100.000	27376	8178	0.960	--
总计		158550	100.000	27376			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	41092	100.000	7075	3829	1.013	--
总计		41092	100.000	7075			

图10 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-351-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 12:29:55
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

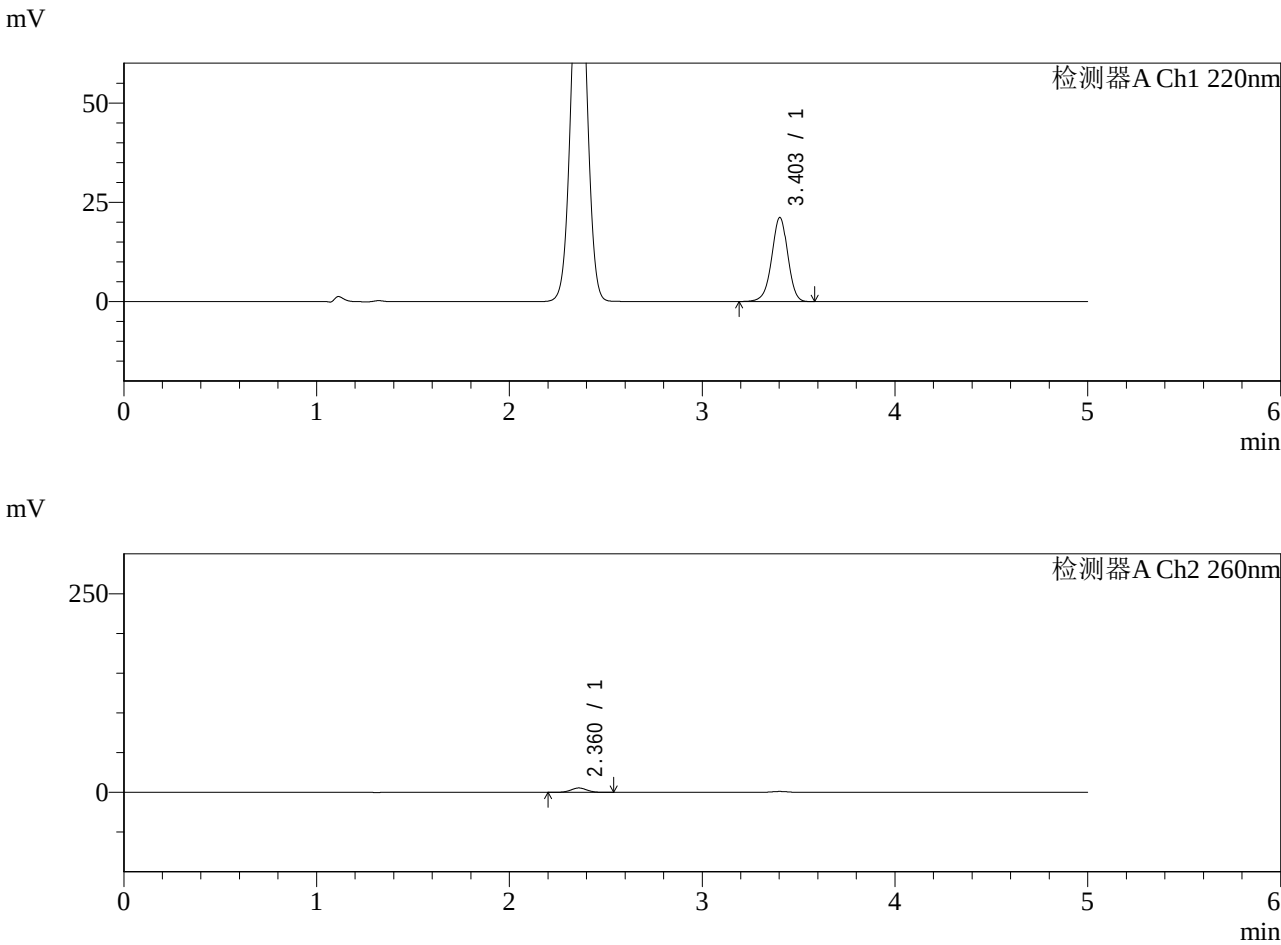

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.403	122571	100.000	21174	8182	0.961	--
总计		122571	100.000	21174			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	32042	100.000	5527	3845	1.019	--
总计		32042	100.000	5527			

图11 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-352-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 12:35:17
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

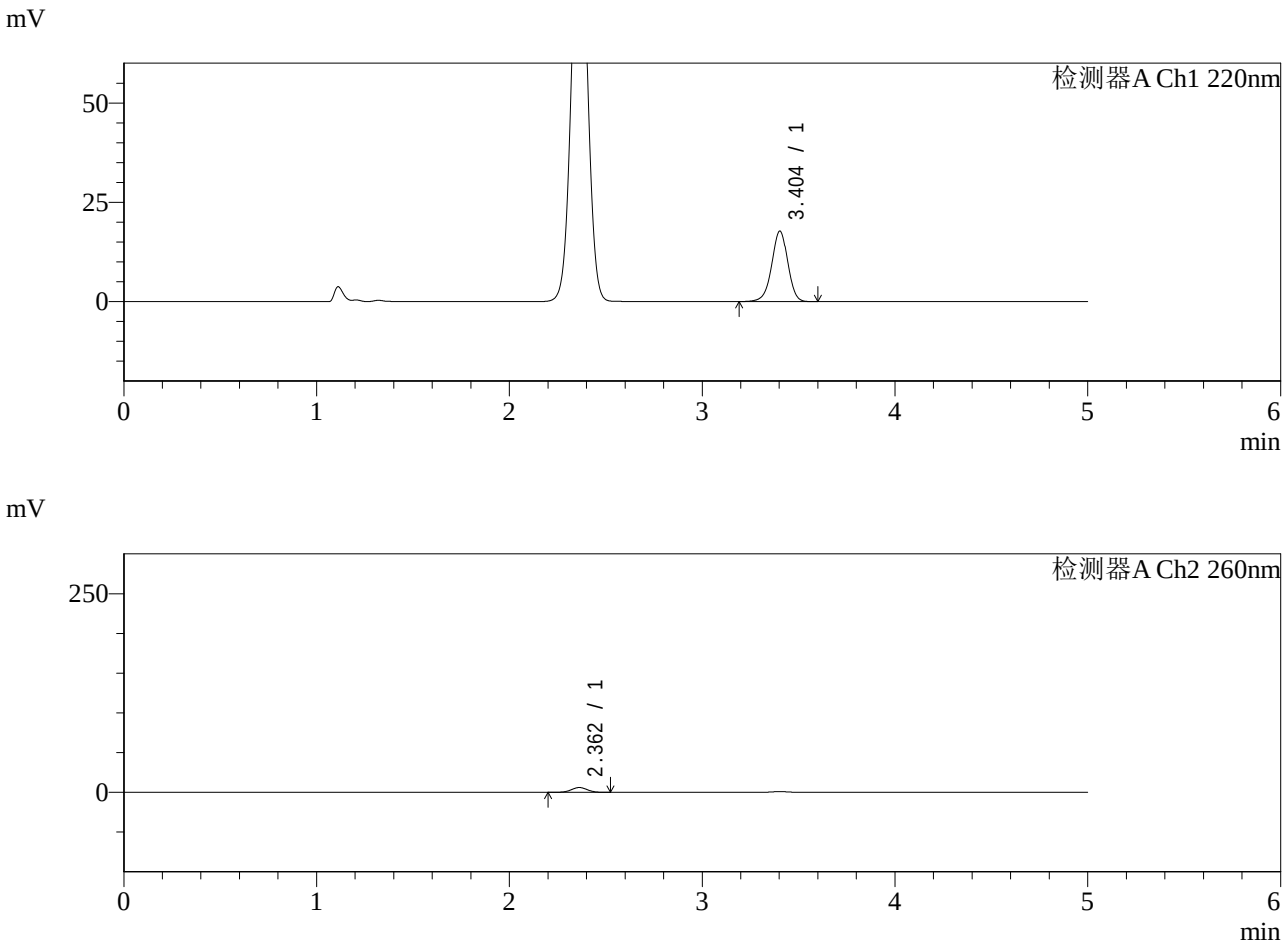

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.404	102735	100.000	17736	8174	0.961	--
总计		102735	100.000	17736			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	34994	100.000	6069	3838	1.014	--
总计		34994	100.000	6069			

图12 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-353-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 12:40:39
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

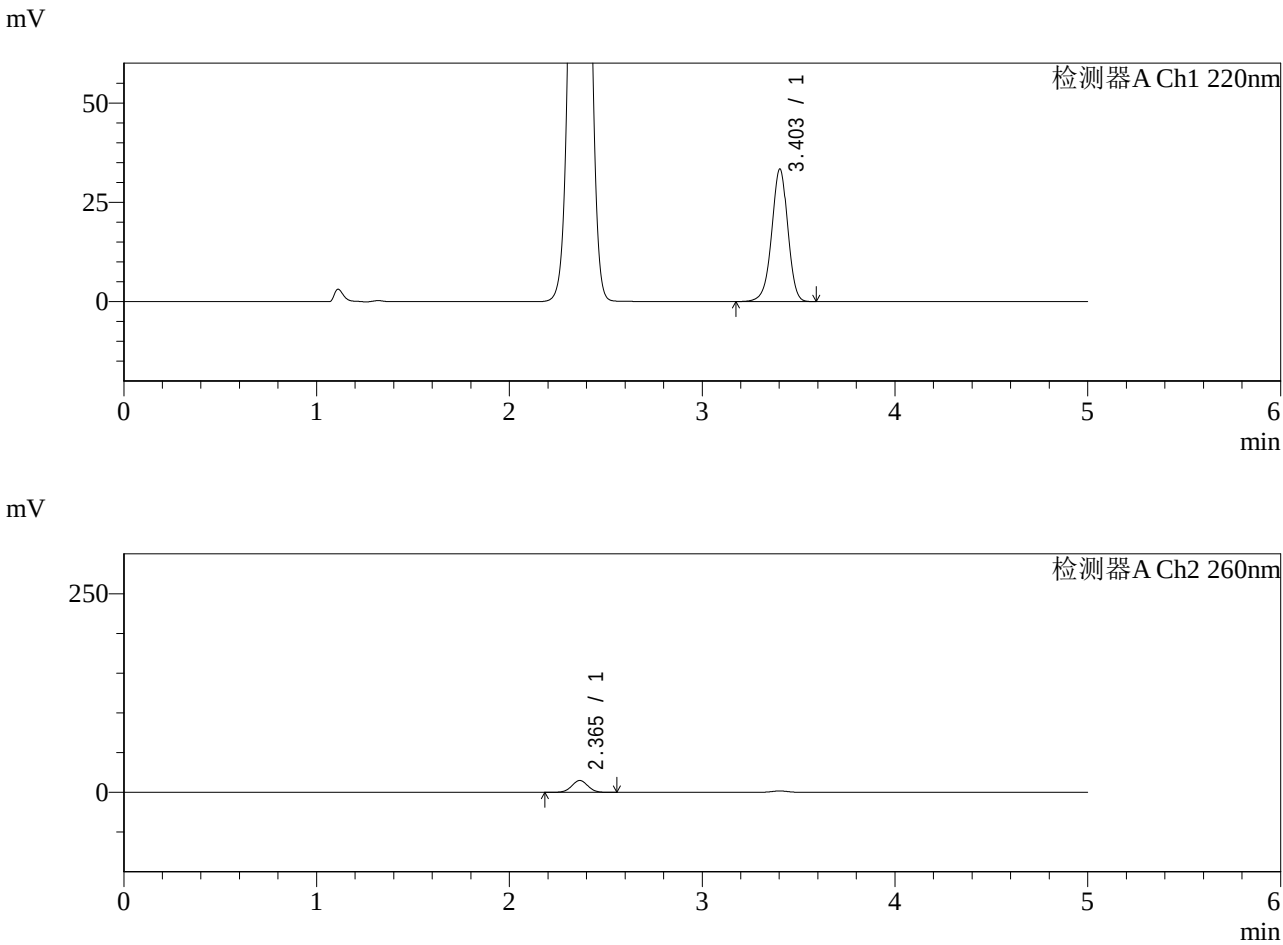

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.403	193360	100.000	33369	8175	0.958	--
总计		193360	100.000	33369			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.365	87247	100.000	14910	3764	1.016	--
总计		87247	100.000	14910			

图13 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-354-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 12:46:01
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

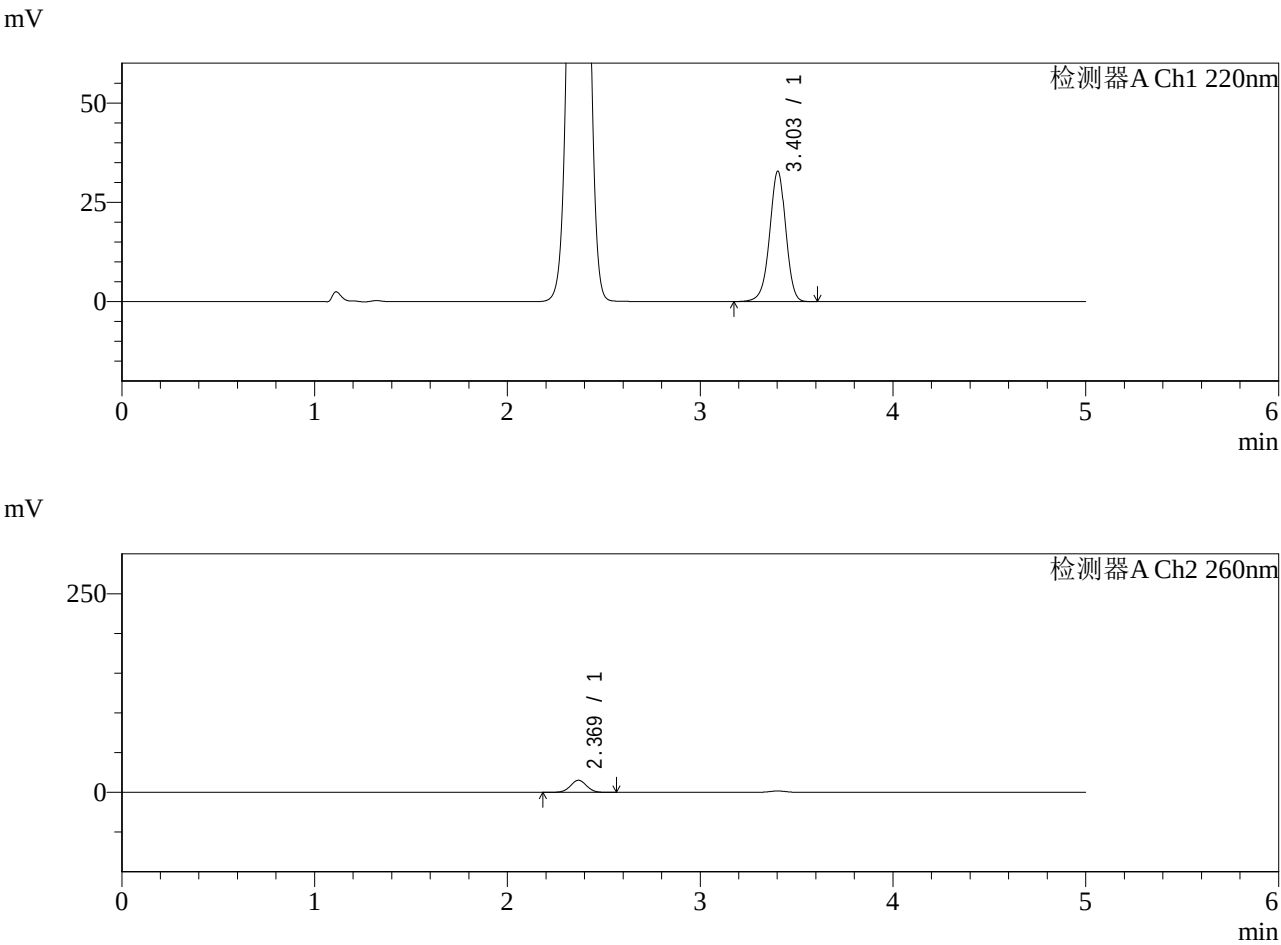

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.403	190085	100.000	32803	8183	0.960	--
总计		190085	100.000	32803			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	89019	100.000	15167	3772	1.014	--
总计		89019	100.000	15167			

图14 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-355-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 12:51:25
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

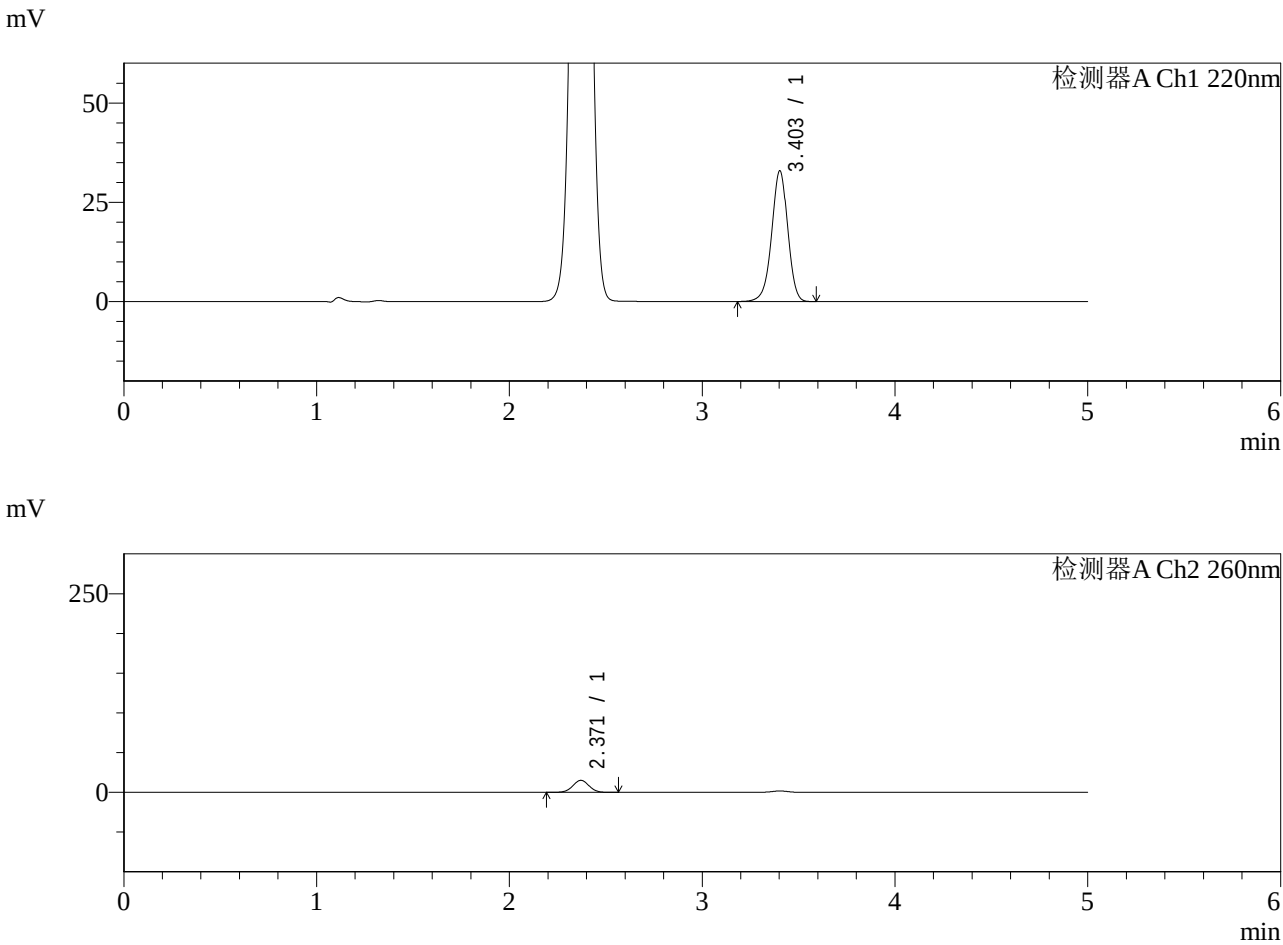

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.403	190404	100.000	32890	8184	0.960	--
总计		190404	100.000	32890			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	88927	100.000	15171	3764	1.014	--
总计		88927	100.000	15171			

图15 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-356-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 12:56:46
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

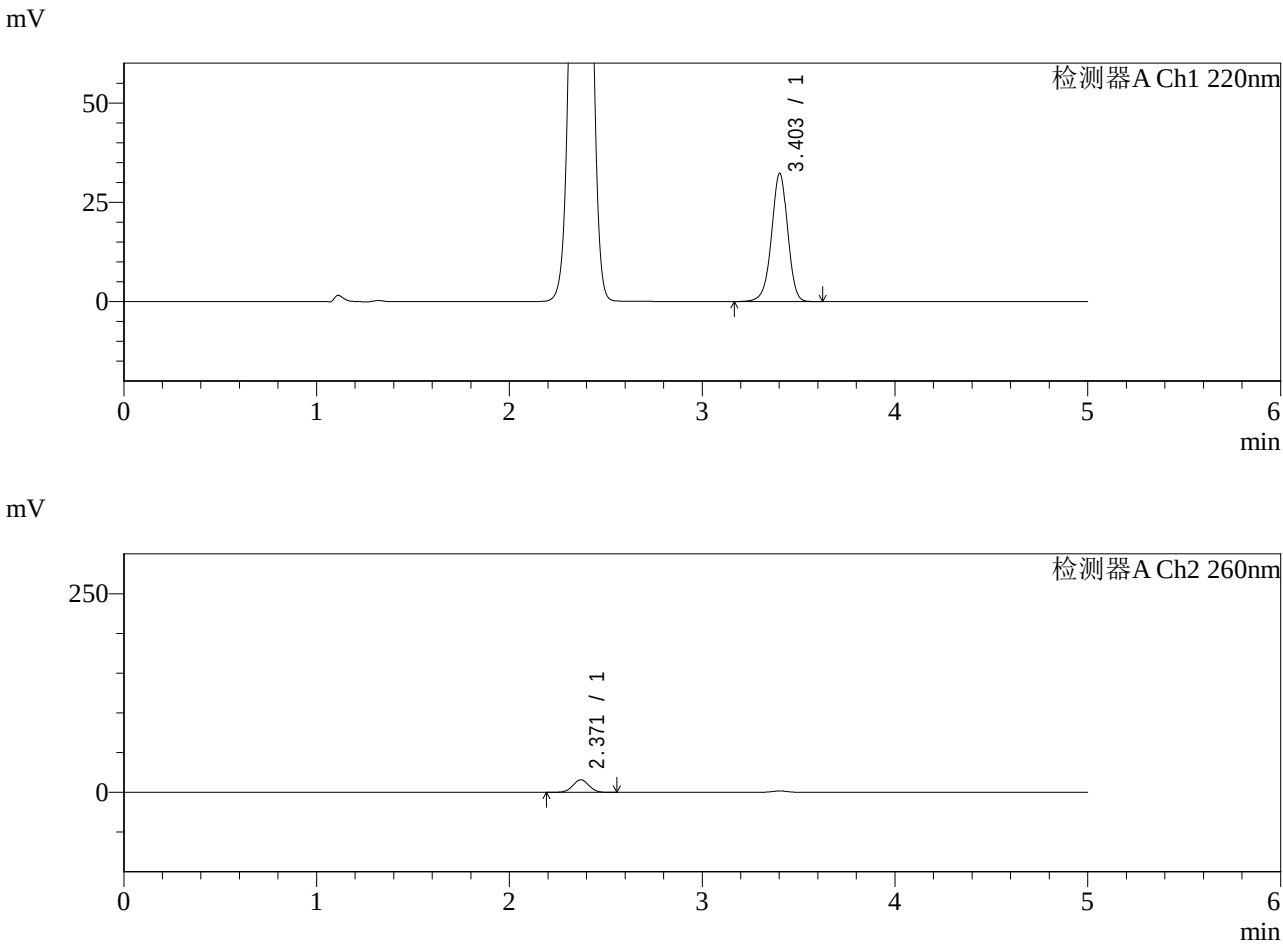

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.403	187518	100.000	32273	8170	0.959	--
总计		187518	100.000	32273			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	92758	100.000	15837	3763	1.012	--
总计		92758	100.000	15837			

图16 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-357-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 13:02:08
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

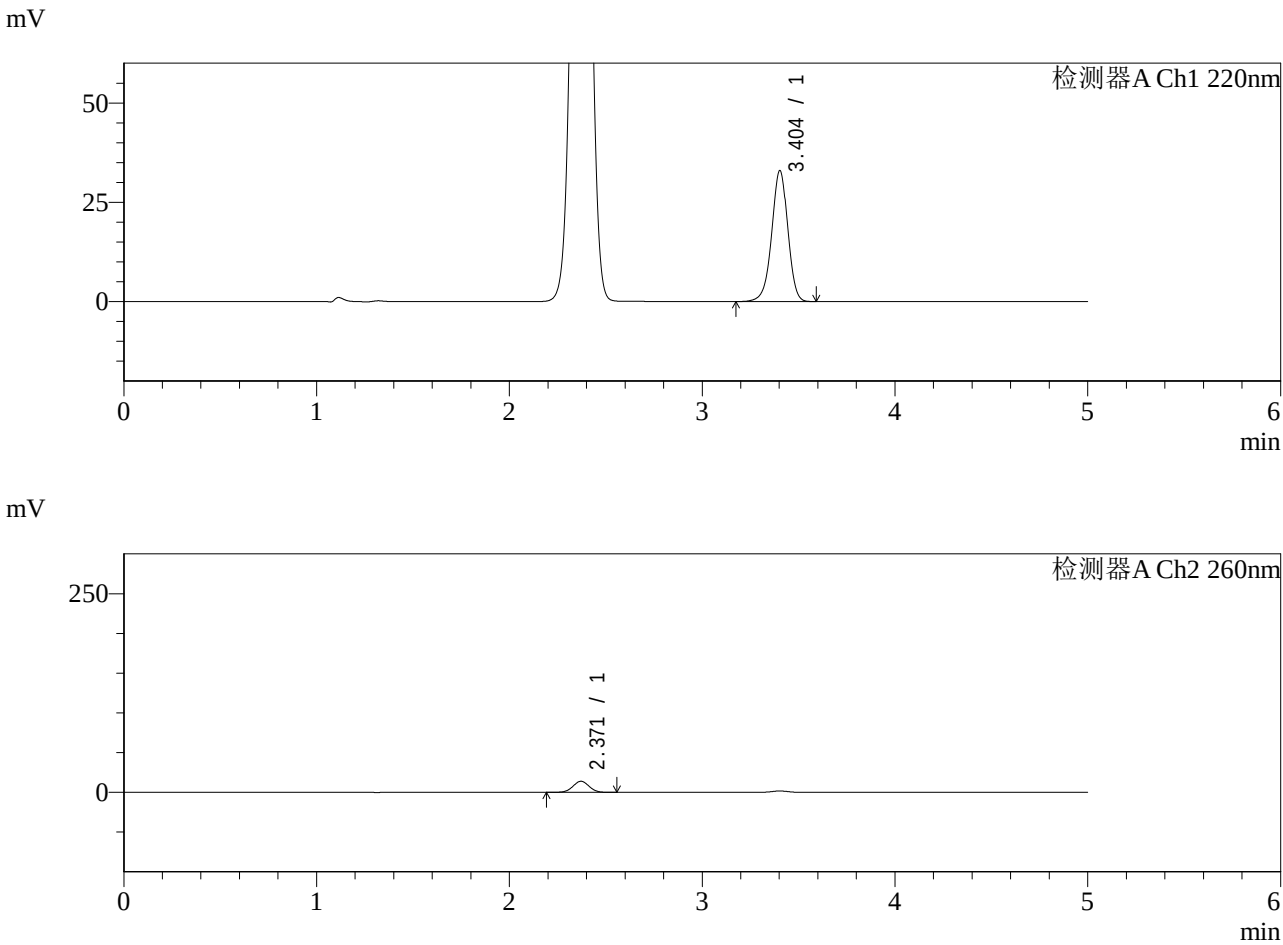

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.404	191069	100.000	32970	8174	0.959	--
总计		191069	100.000	32970			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	81857	100.000	13992	3776	1.013	--
总计		81857	100.000	13992			

图17 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-358-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 13:07:31
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

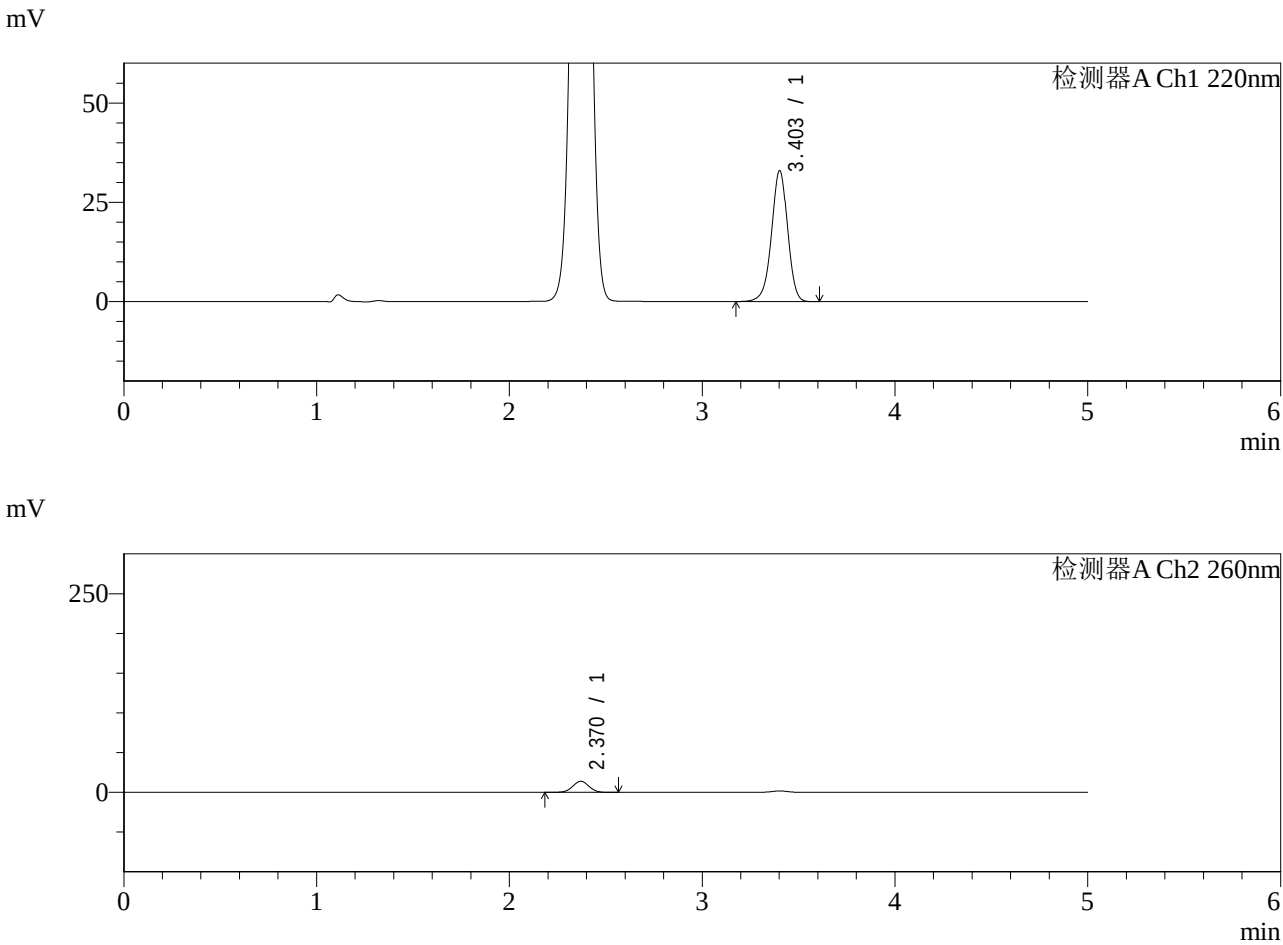

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.403	191122	100.000	32922	8180	0.959	--
总计		191122	100.000	32922			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	81832	100.000	13961	3773	1.012	--
总计		81832	100.000	13961			

图18 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-359-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 13:12:54
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

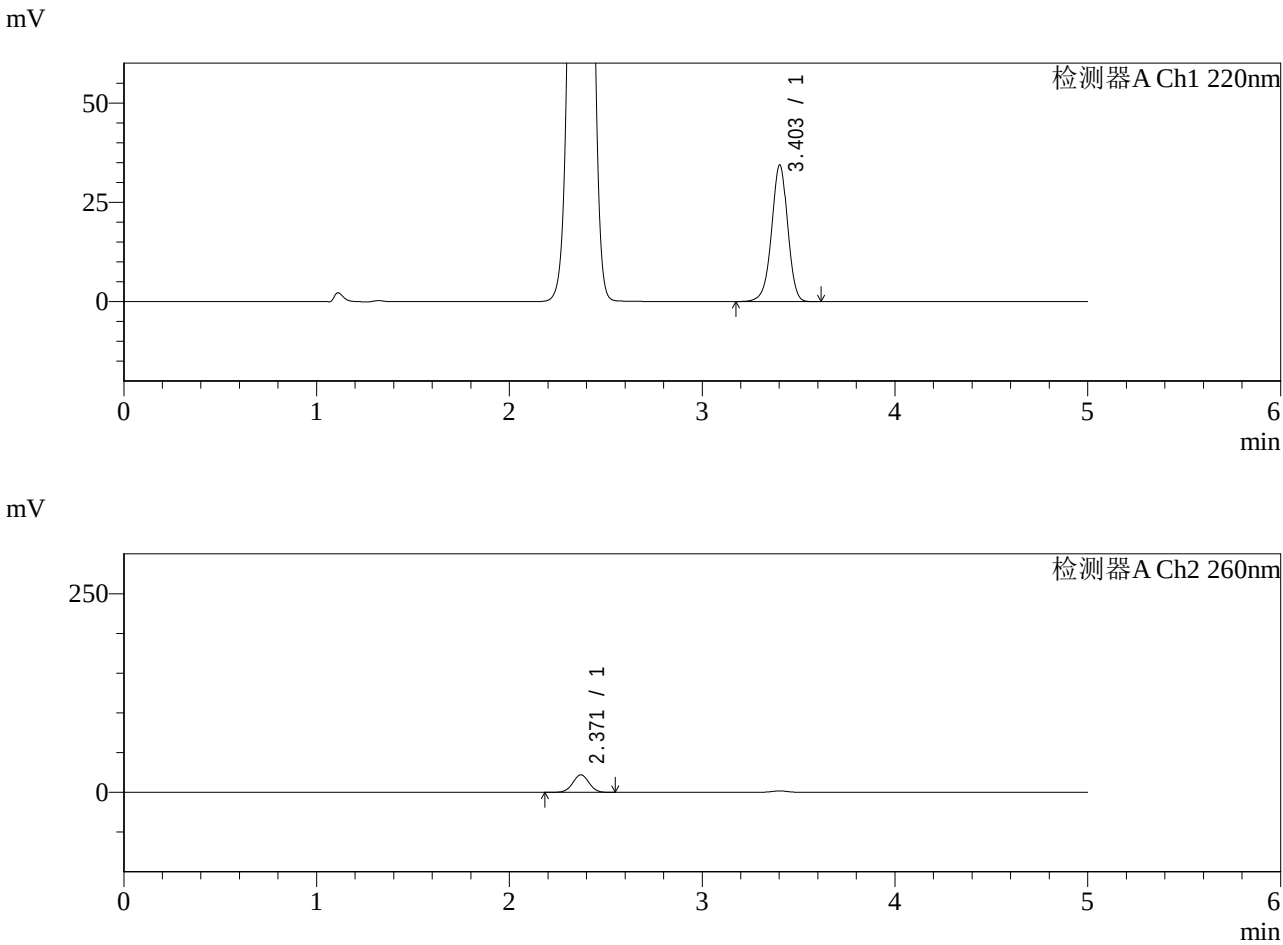

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.403	199409	100.000	34370	8174	0.959	--
总计		199409	100.000	34370			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	129723	100.000	22031	3726	1.011	--
总计		129723	100.000	22031			

图19 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-360-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 13:18:17
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

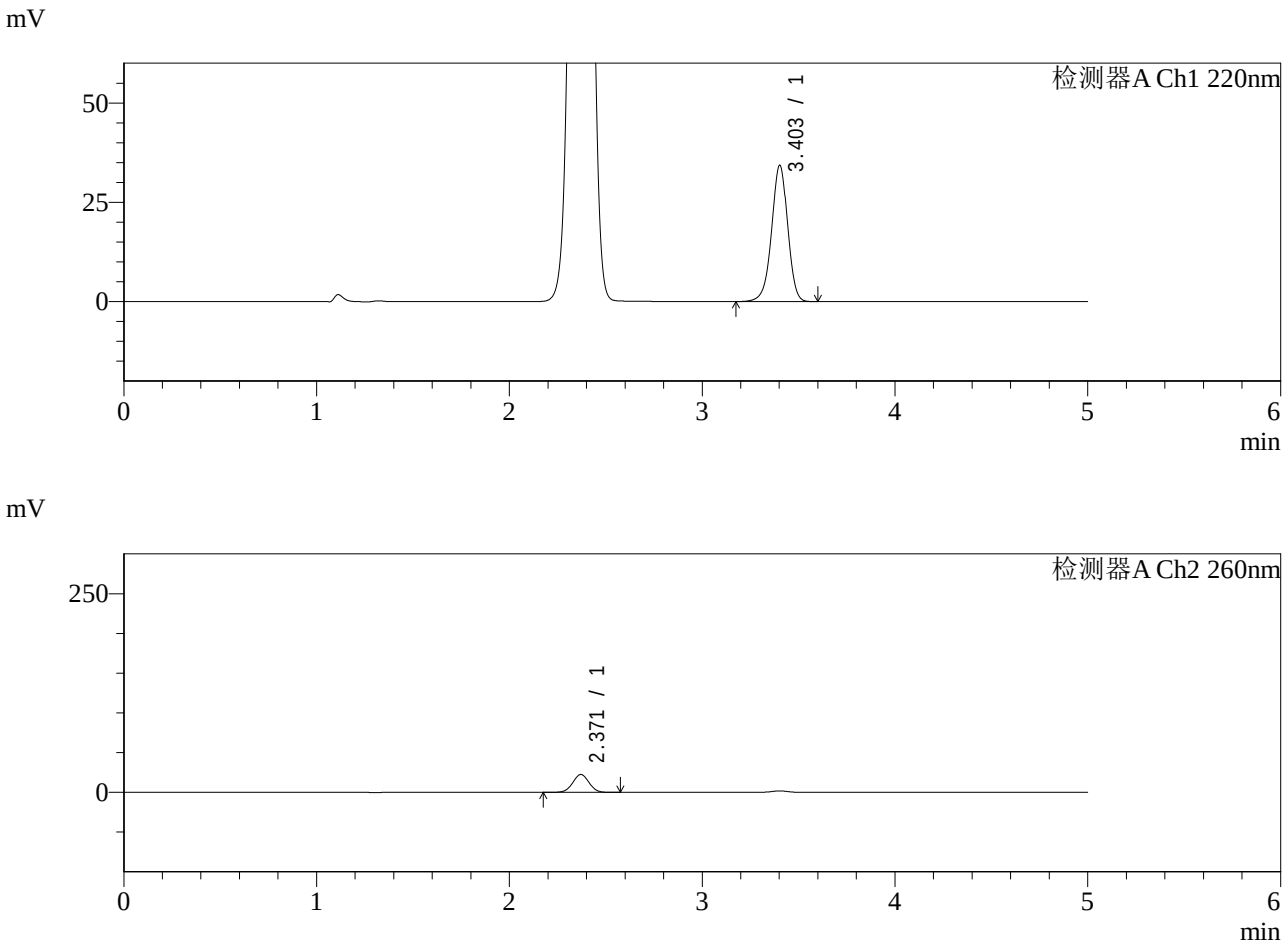

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.403	198506	100.000	34253	8171	0.959	--
总计		198506	100.000	34253			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	132588	100.000	22482	3724	1.010	--
总计		132588	100.000	22482			

图20 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-361-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 13:23:38
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

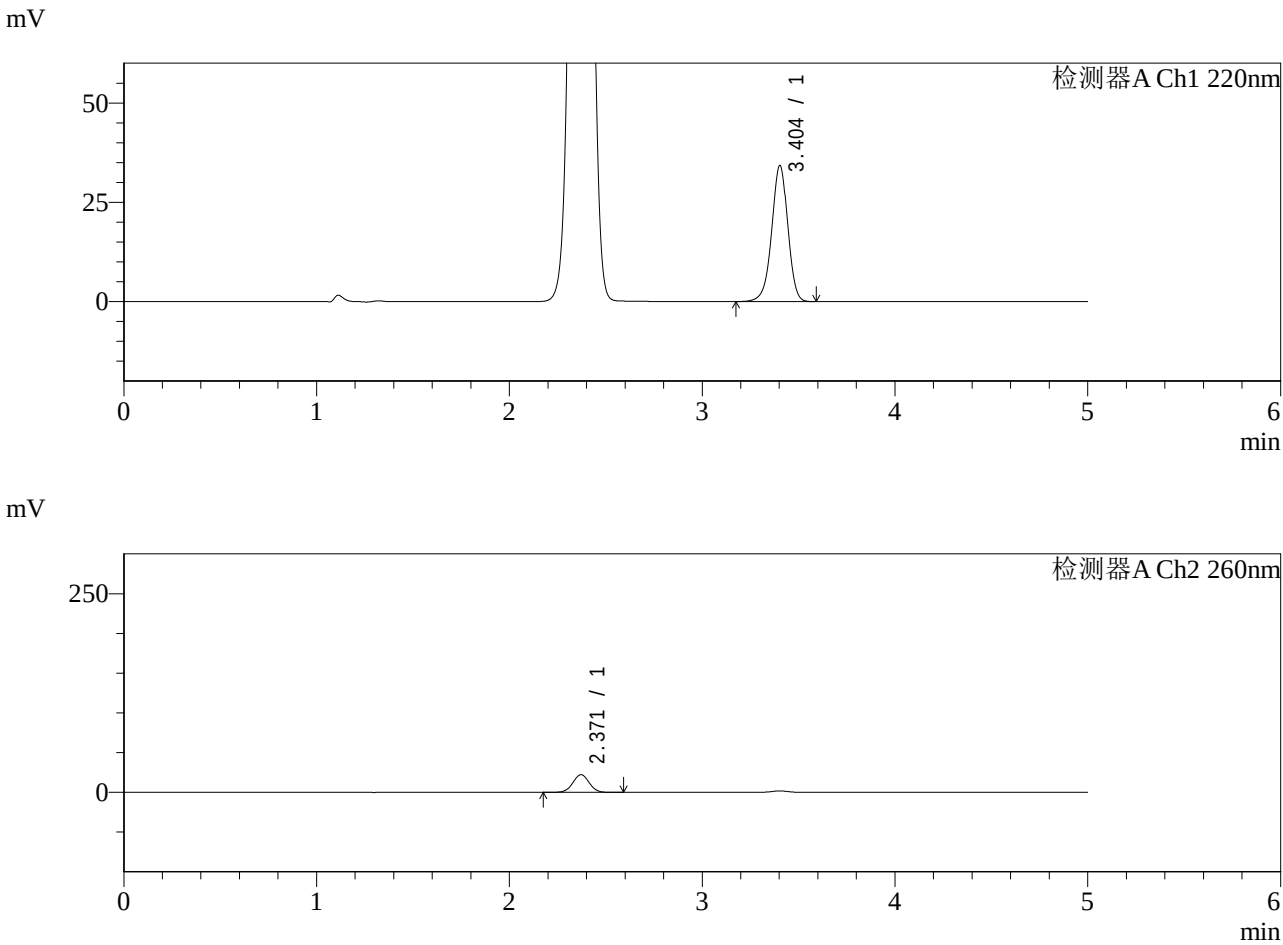

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.404	198443	100.000	34241	8165	0.959	--
总计		198443	100.000	34241			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	131631	100.000	22296	3719	1.010	--
总计		131631	100.000	22296			

图21 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-362-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 13:29:01
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

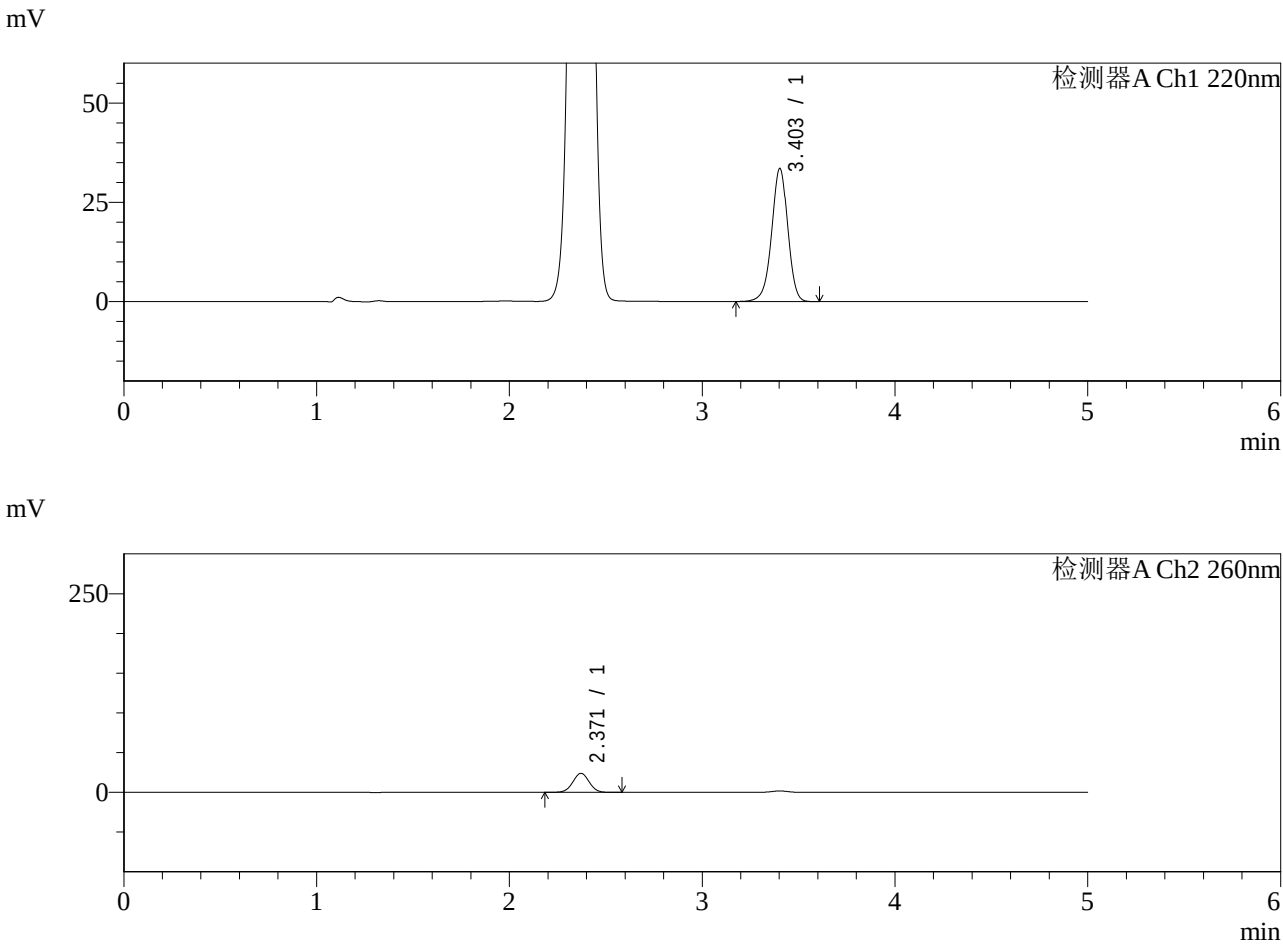

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.403	194242	100.000	33496	8169	0.959	--
总计		194242	100.000	33496			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	141808	100.000	24003	3706	1.011	--
总计		141808	100.000	24003			

图22 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-363-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 13:34:23
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

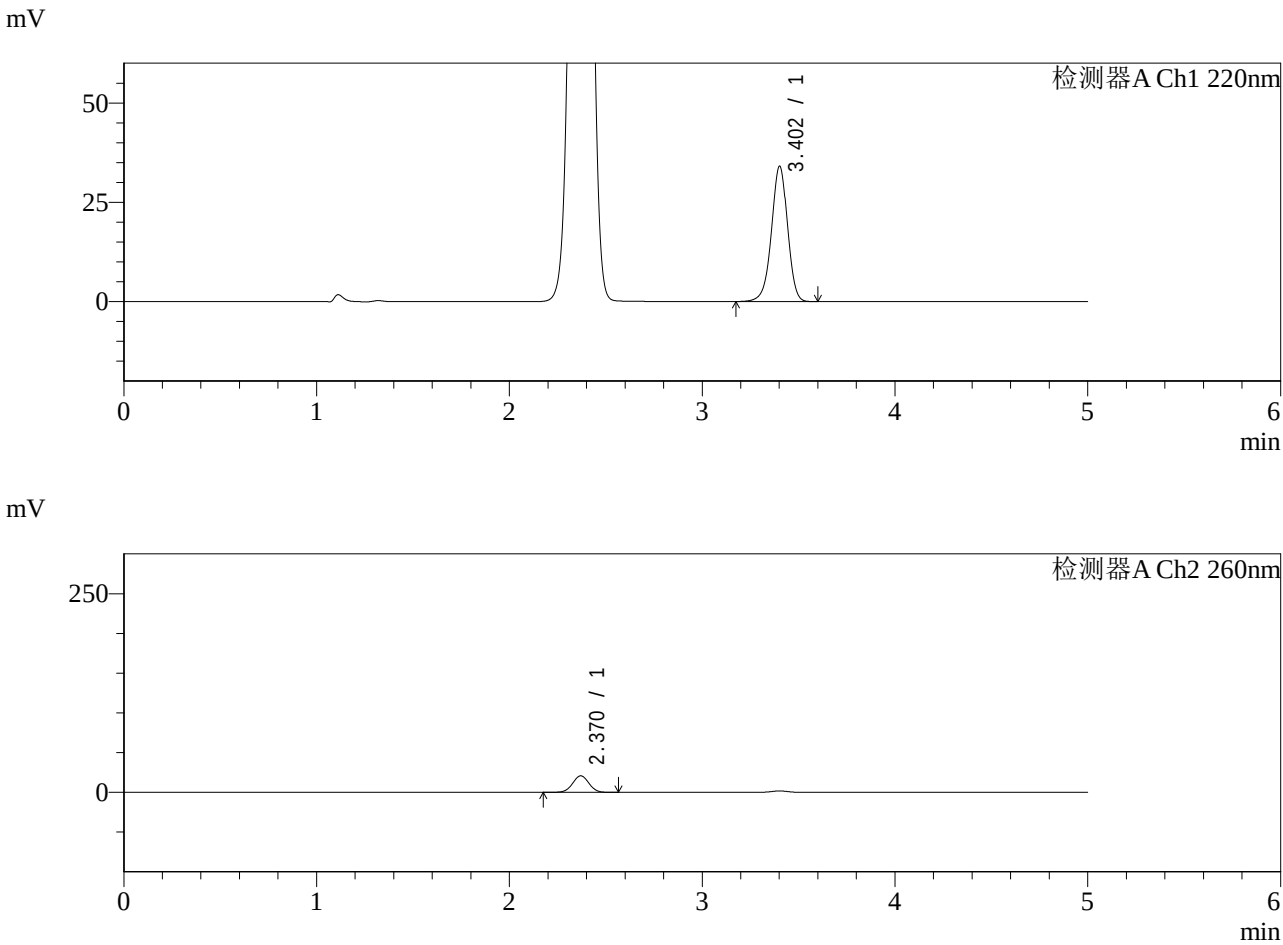

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	197414	100.000	33988	8160	0.959	--
总计		197414	100.000	33988			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	122646	100.000	20816	3726	1.010	--
总计		122646	100.000	20816			

图23 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-364-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 13:39:45
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

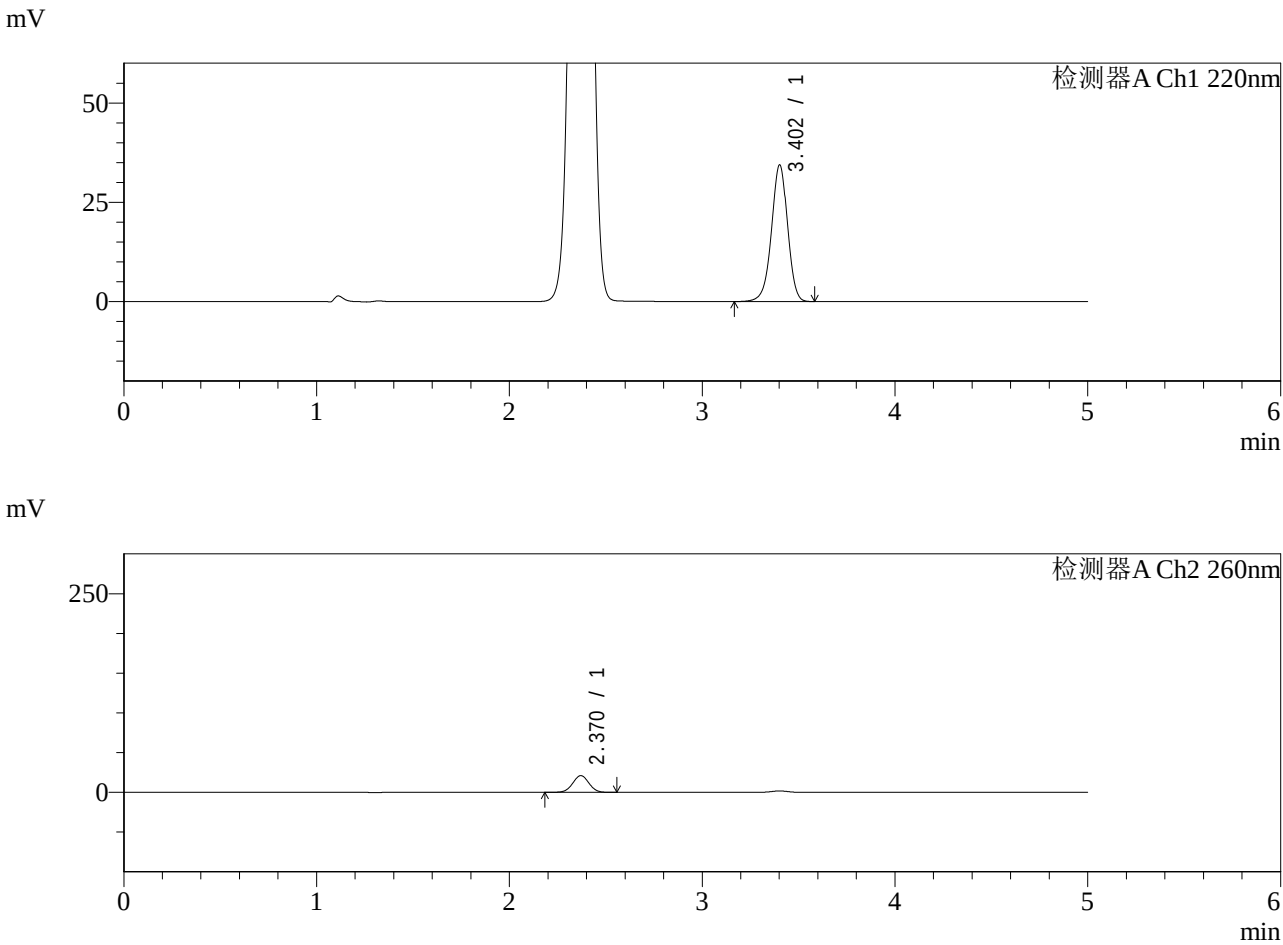

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	199303	100.000	34337	8167	0.960	--
总计		199303	100.000	34337			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	124161	100.000	21066	3723	1.010	--
总计		124161	100.000	21066			

图24 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-365-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 13:45:09
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

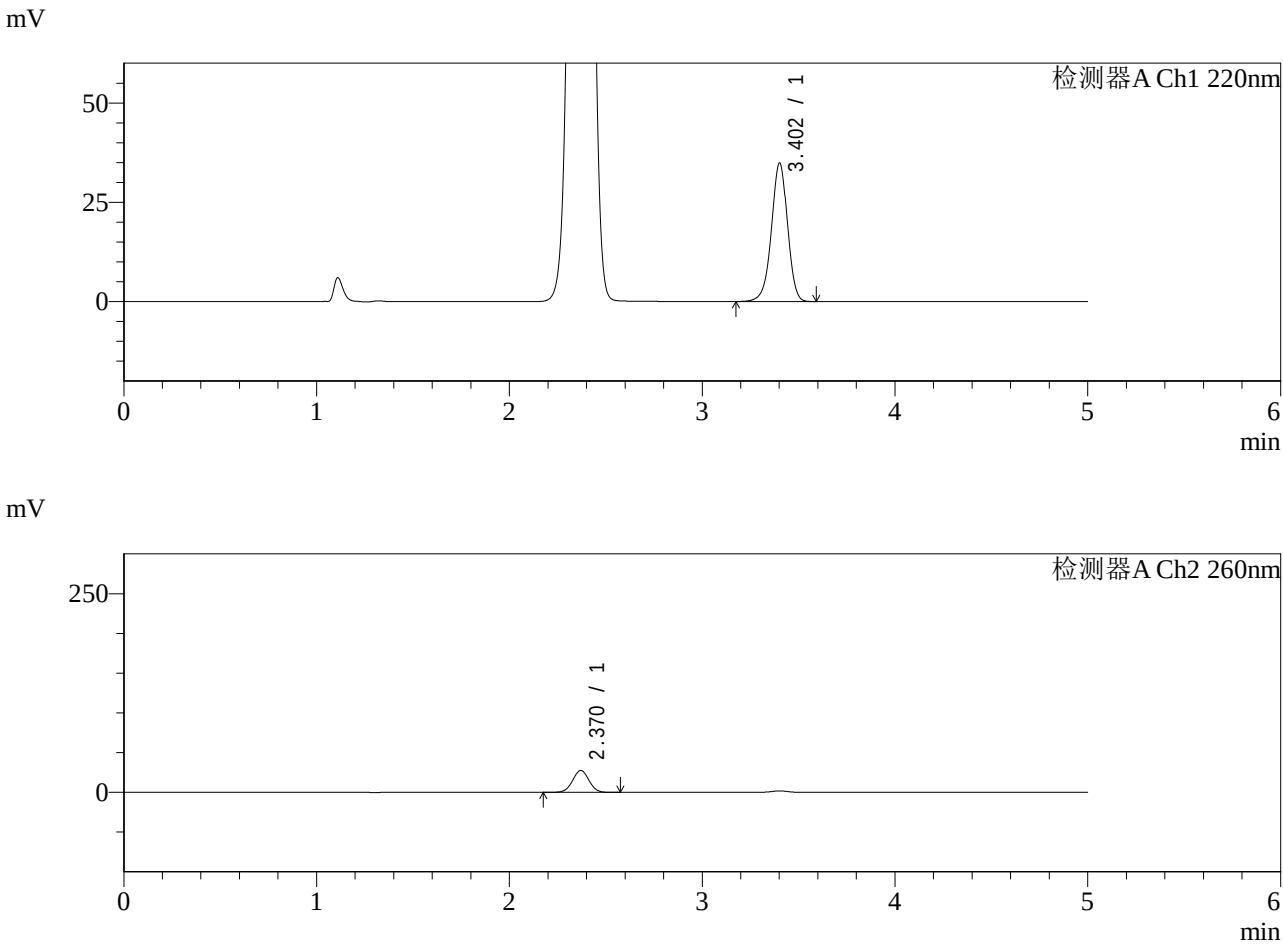

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	201976	100.000	34769	8165	0.959	--
总计		201976	100.000	34769			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	163214	100.000	27567	3690	1.009	--
总计		163214	100.000	27567			

图25 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-366-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 13:50:31
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

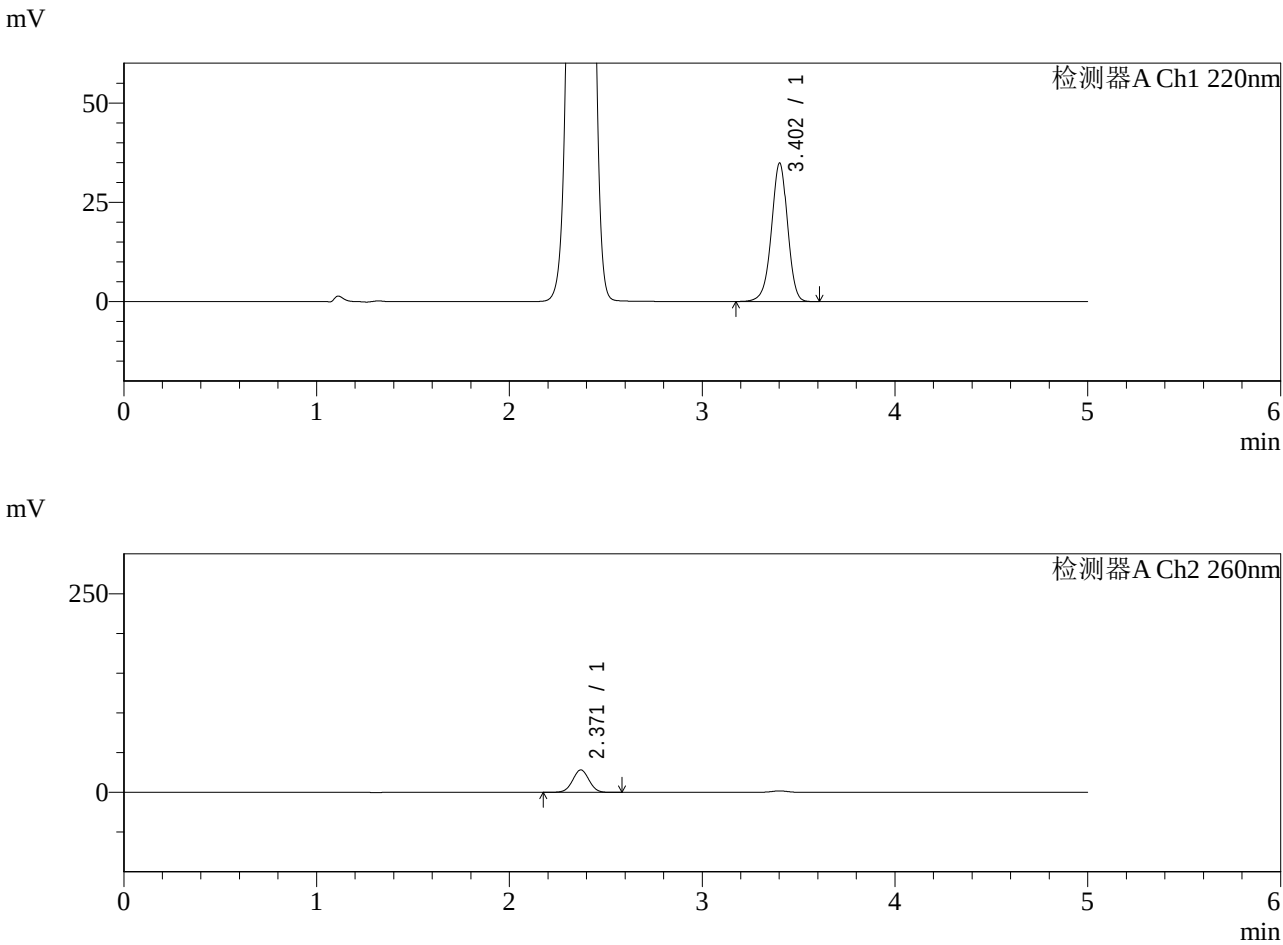

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	201913	100.000	34777	8159	0.960	--
总计		201913	100.000	34777			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	167517	100.000	28284	3690	1.009	--
总计		167517	100.000	28284			

图26 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-367-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 13:55:54
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

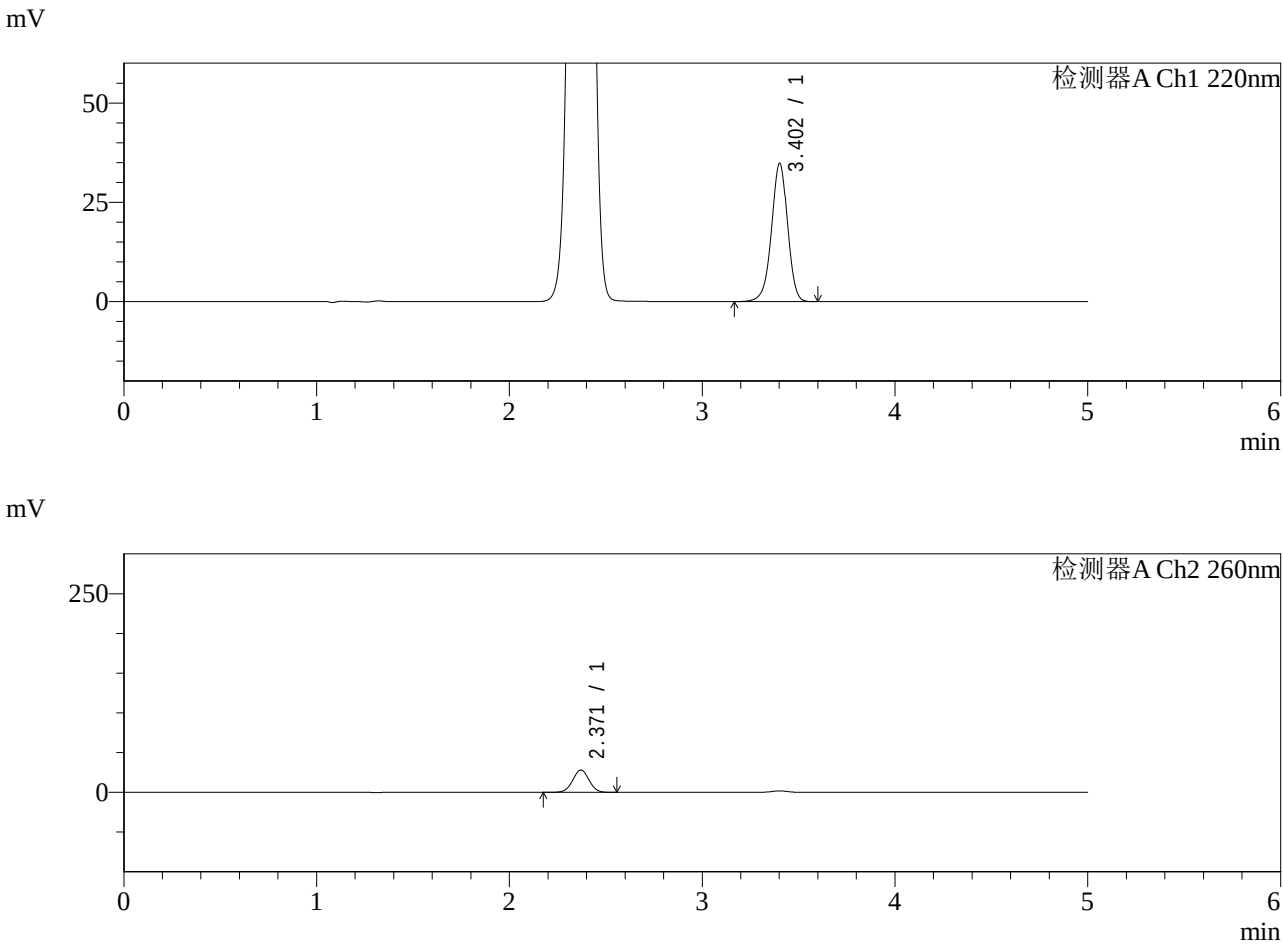

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	201800	100.000	34733	8171	0.958	--
总计		201800	100.000	34733			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	166089	100.000	28053	3691	1.009	--
总计		166089	100.000	28053			

图27 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-368-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 14:01:17
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

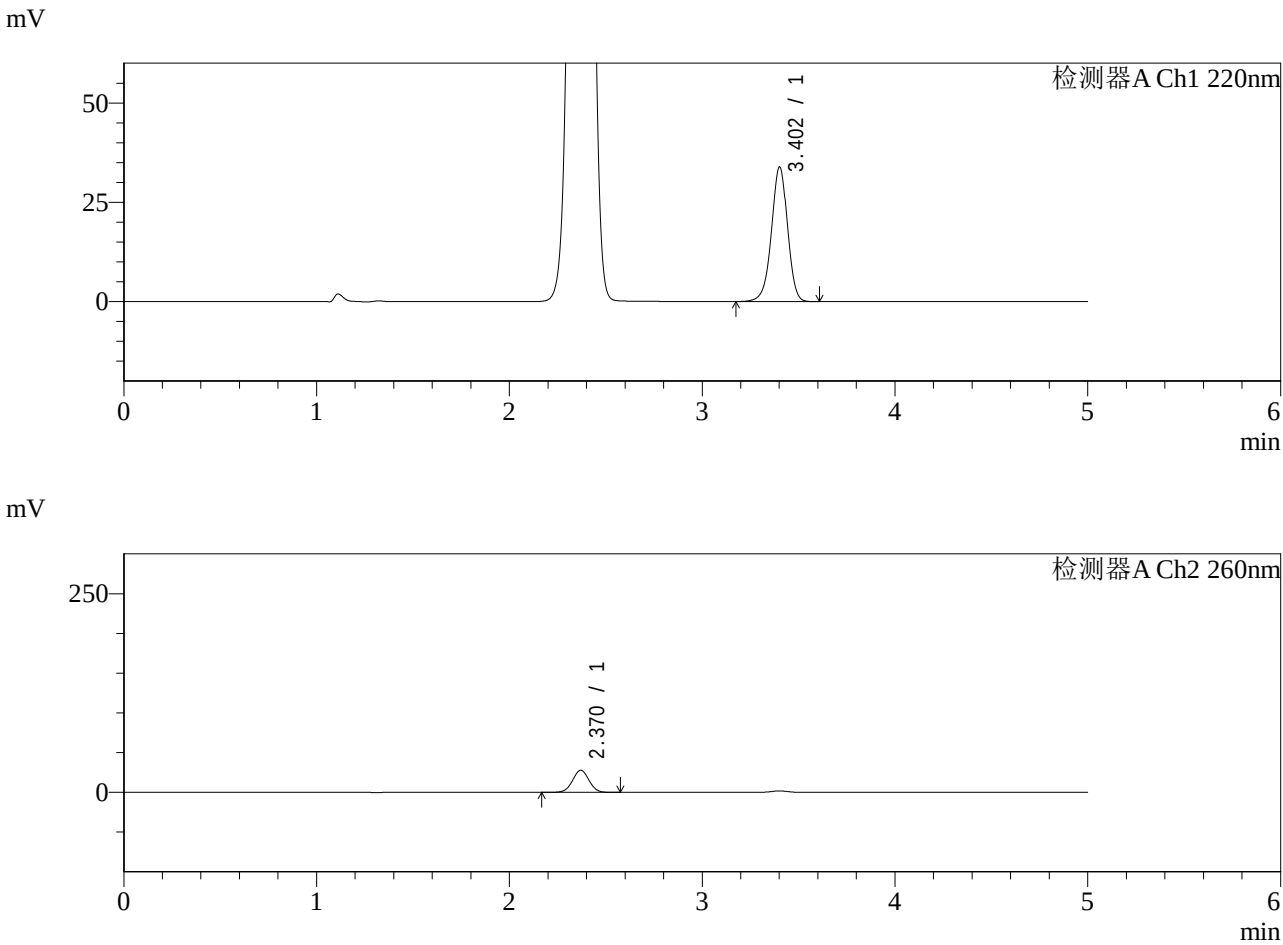

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	196326	100.000	33792	8162	0.960	--
总计		196326	100.000	33792			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	164477	100.000	27746	3686	1.009	--
总计		164477	100.000	27746			

图28 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-369-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 14:06:38
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:15:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

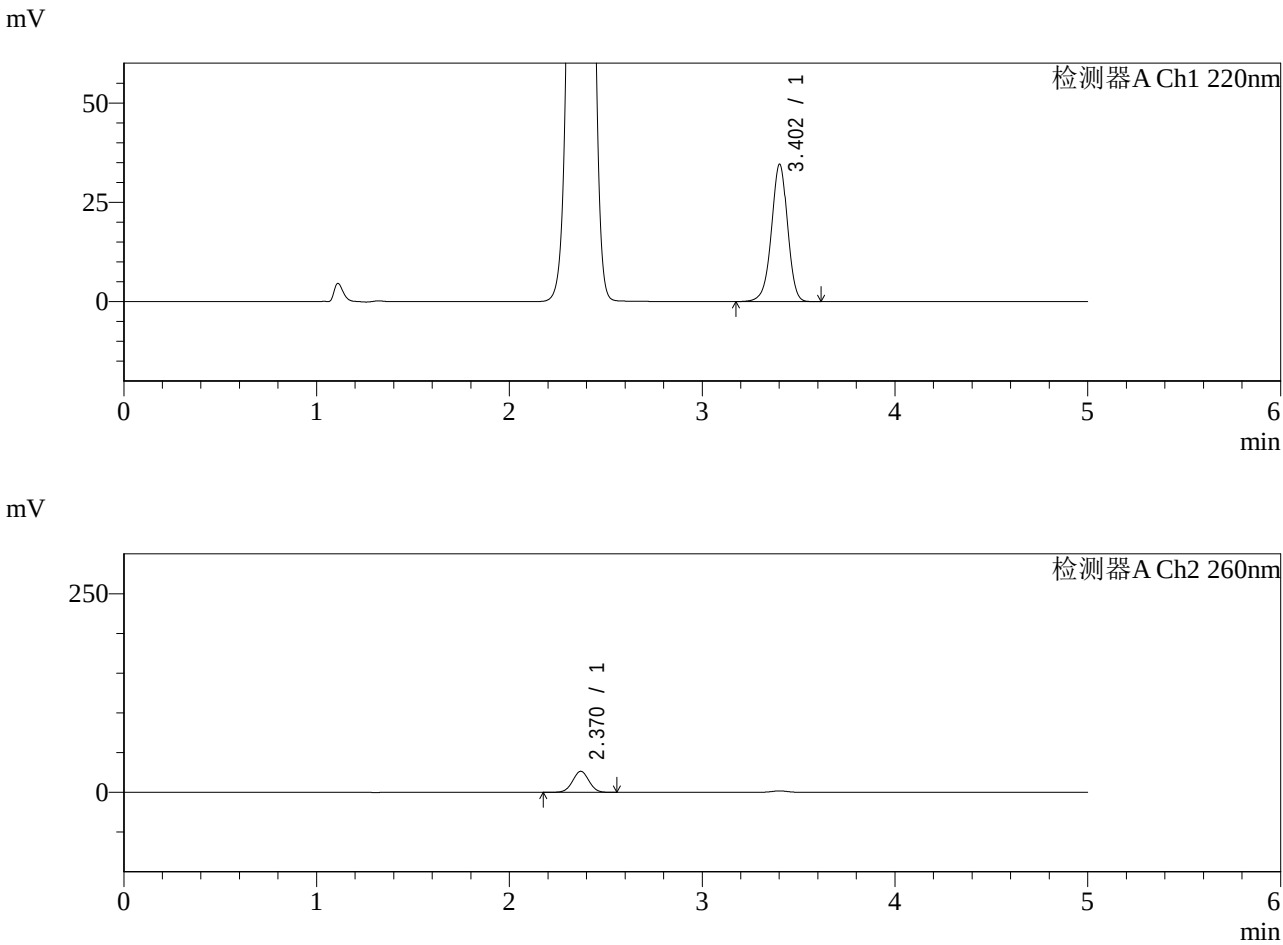

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	200433	100.000	34509	8153	0.960	--
总计		200433	100.000	34509			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	156634	100.000	26460	3692	1.009	--
总计		156634	100.000	26460			

图29 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-370-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 14:12:00
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

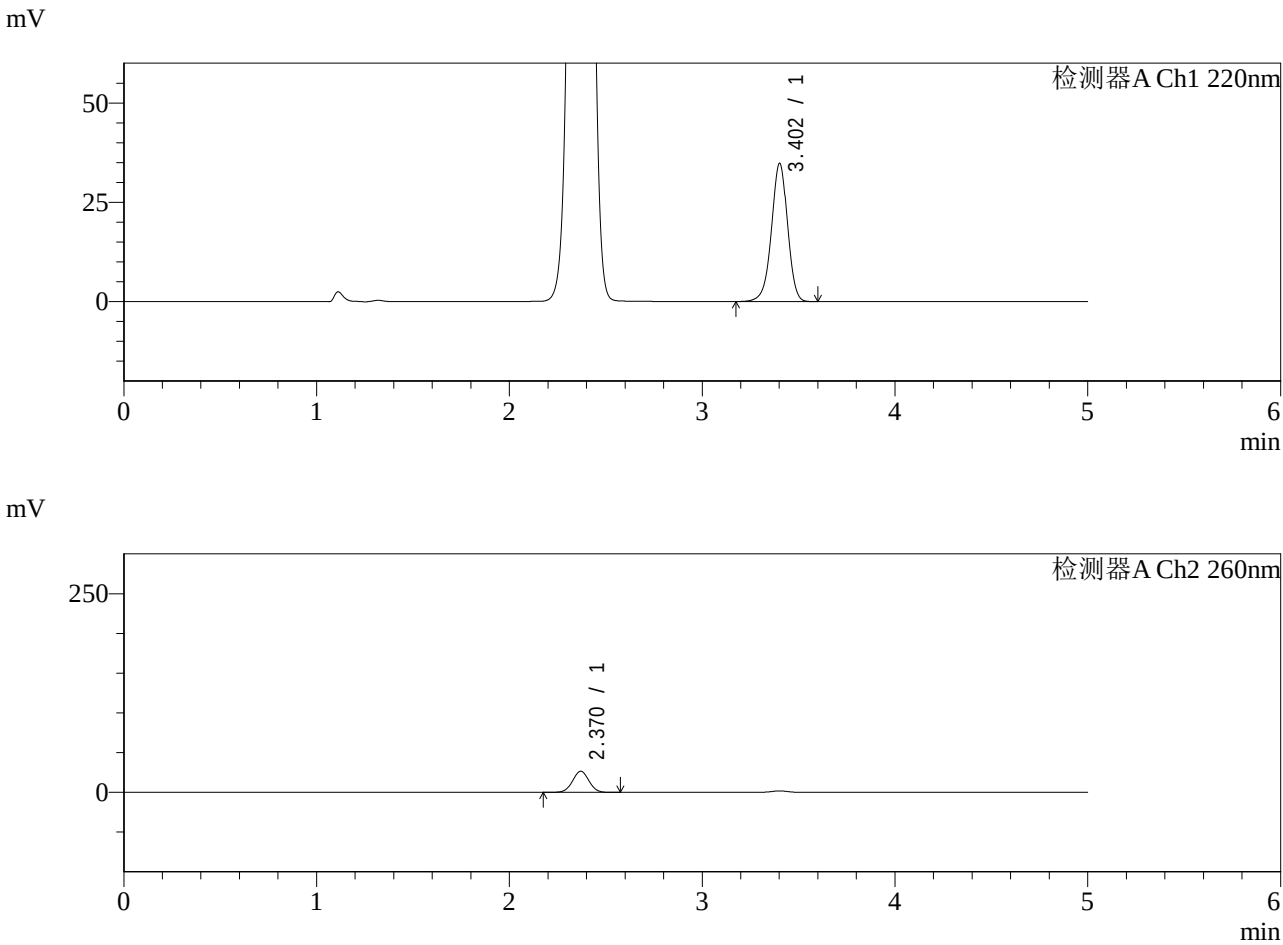

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	201500	100.000	34713	8169	0.960	--
总计		201500	100.000	34713			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	157115	100.000	26552	3694	1.009	--
总计		157115	100.000	26552			

图30 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-371-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 14:17:23
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

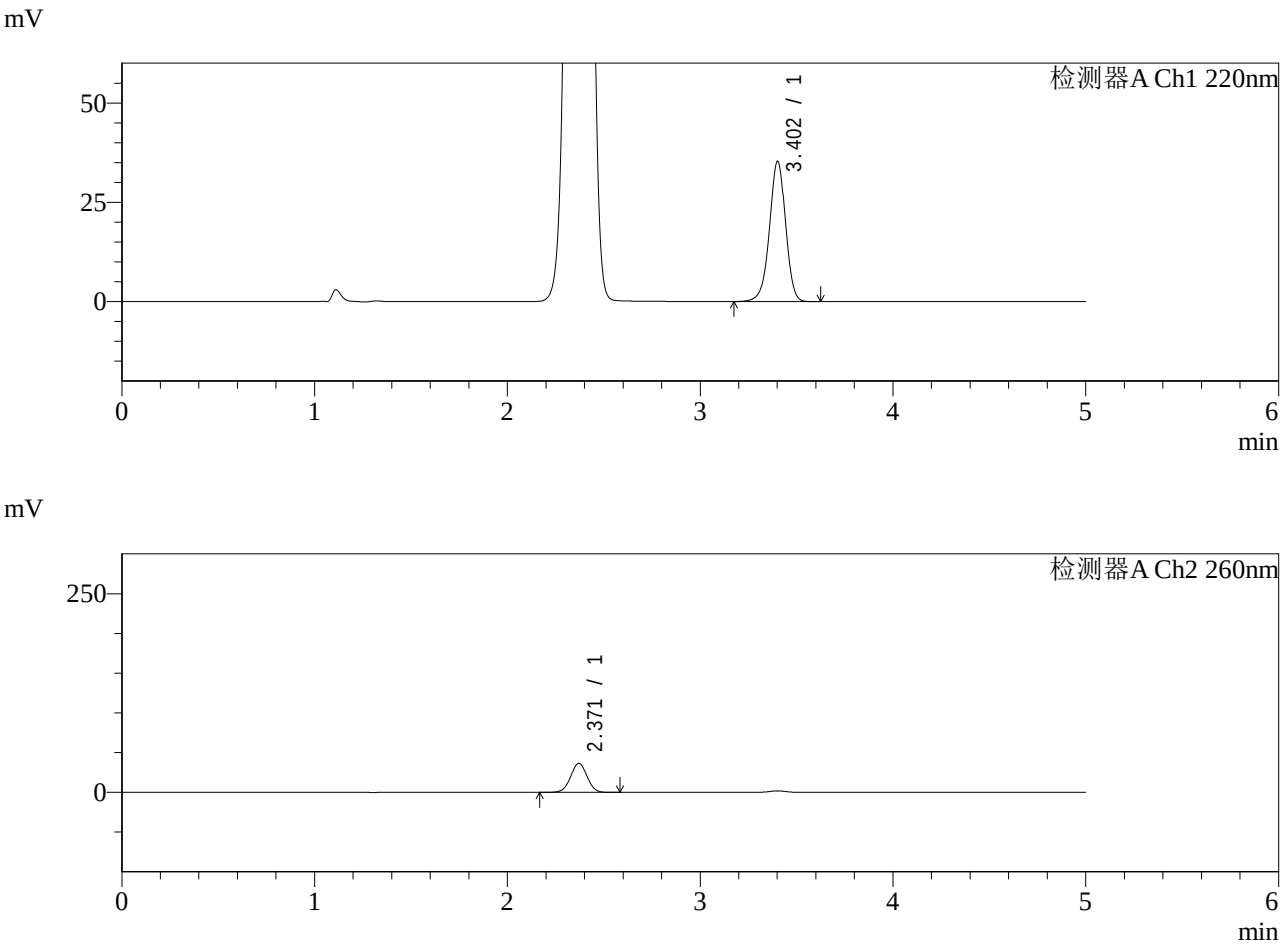

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	204826	100.000	35247	8150	0.960	--
总计		204826	100.000	35247			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	217239	100.000	36485	3654	1.006	--
总计		217239	100.000	36485			

图31 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-372-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 14:22:44
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

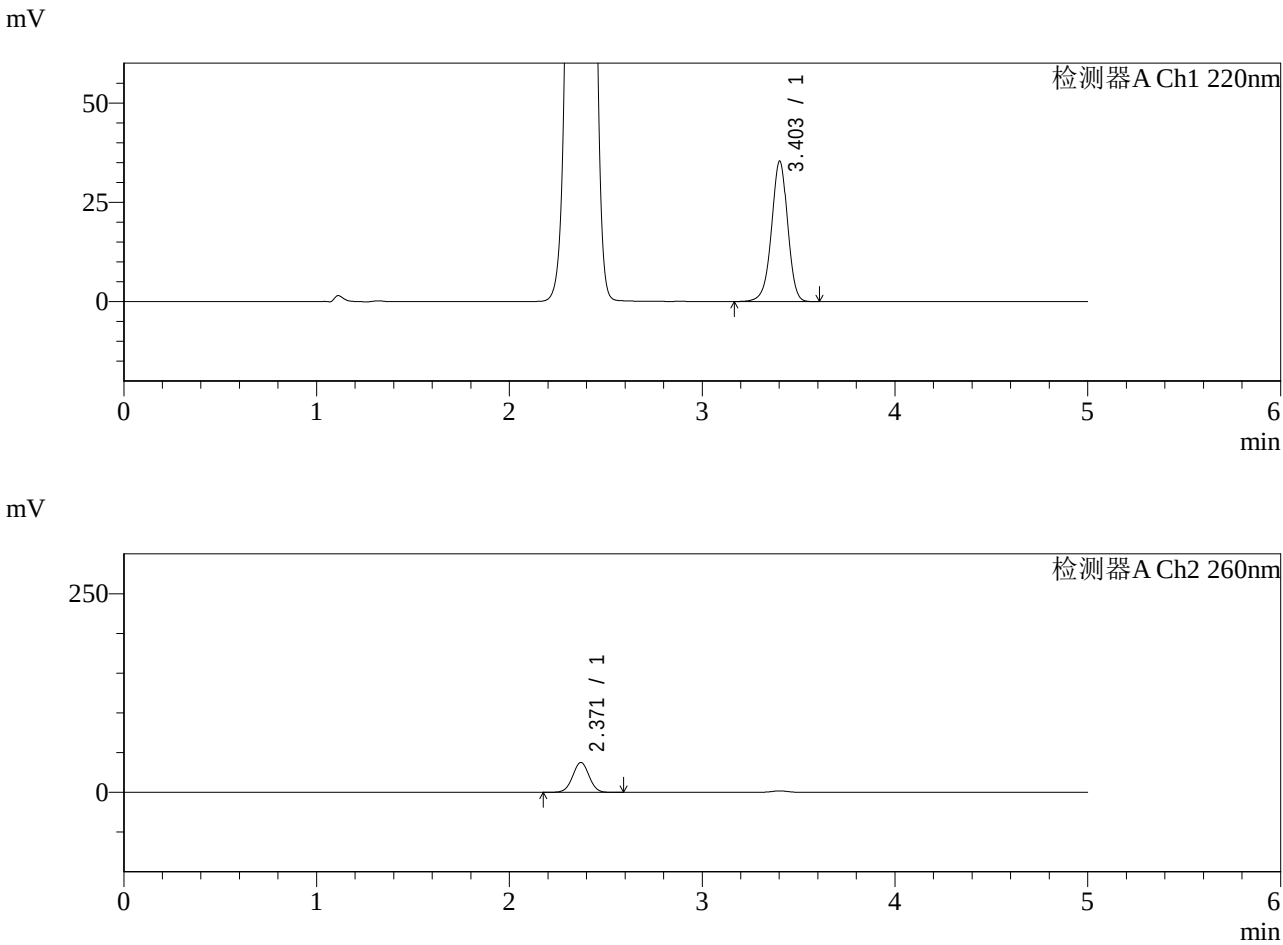

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.403	204959	100.000	35278	8160	0.959	--
总计		204959	100.000	35278			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	223780	100.000	37605	3651	1.007	--
总计		223780	100.000	37605			

图32 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-373-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 14:28:07
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

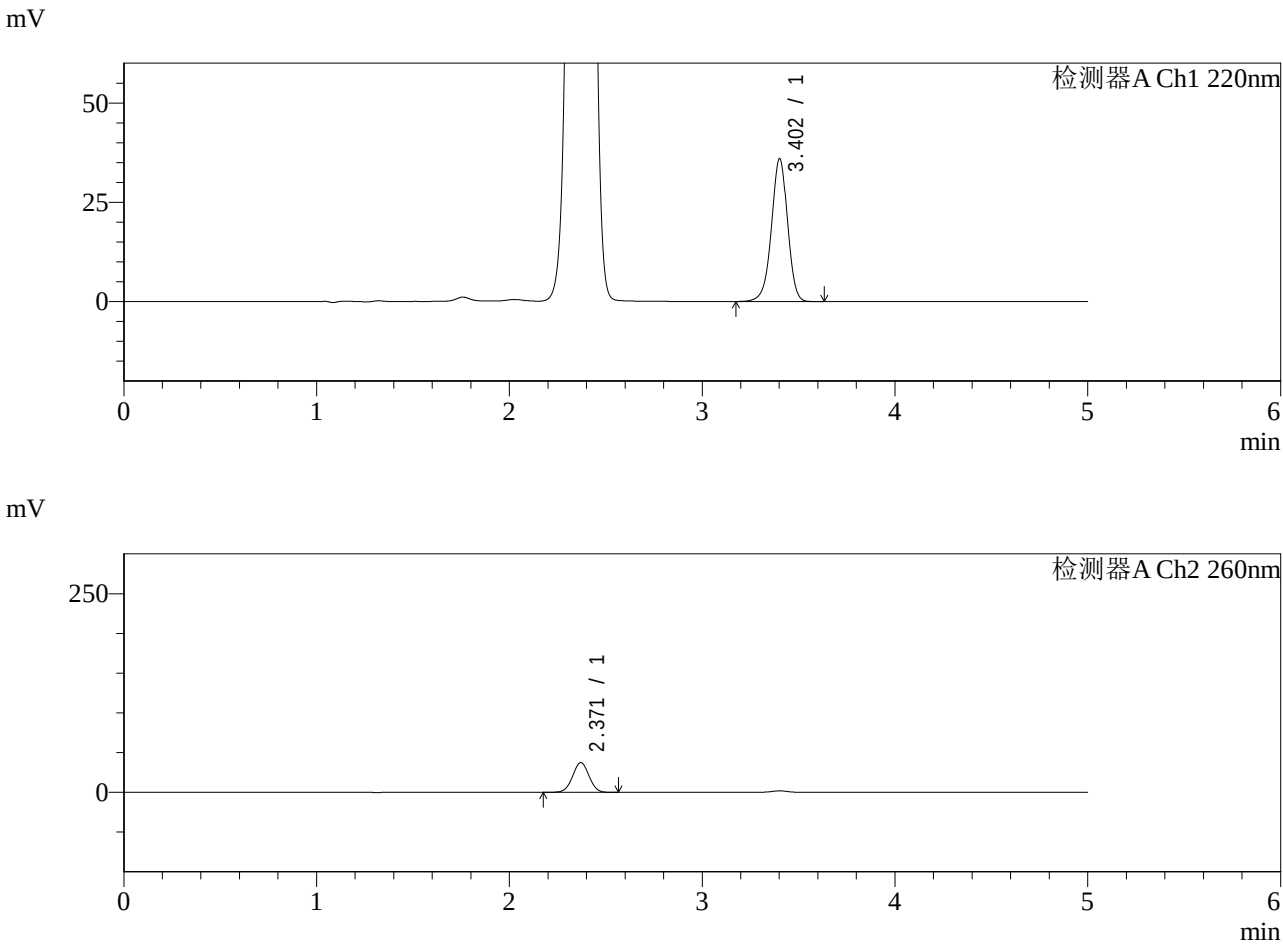

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	208672	100.000	35888	8150	0.960	--
总计		208672	100.000	35888			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	222944	100.000	37492	3654	1.006	--
总计		222944	100.000	37492			

图33 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-374-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 14:33:30
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

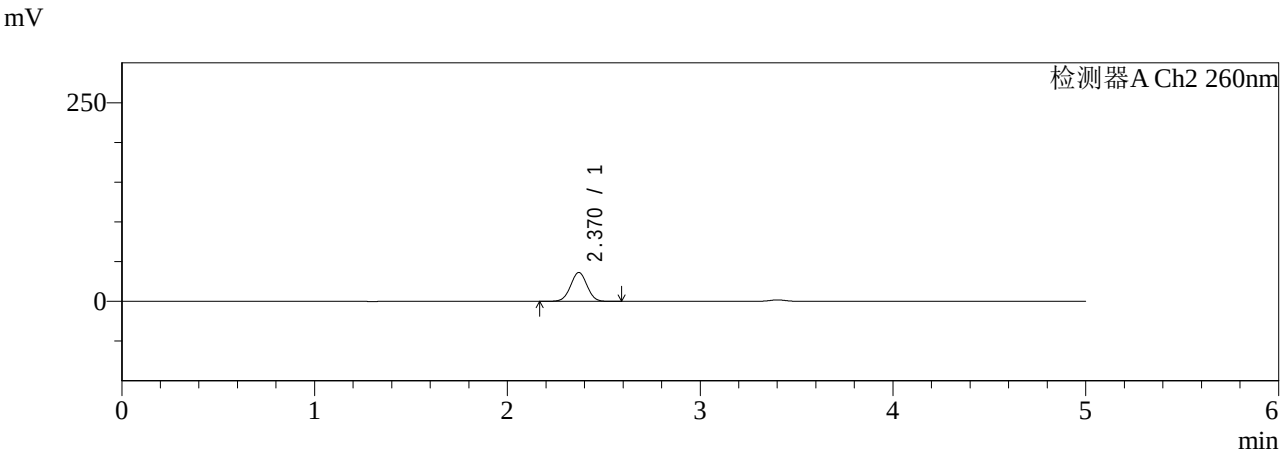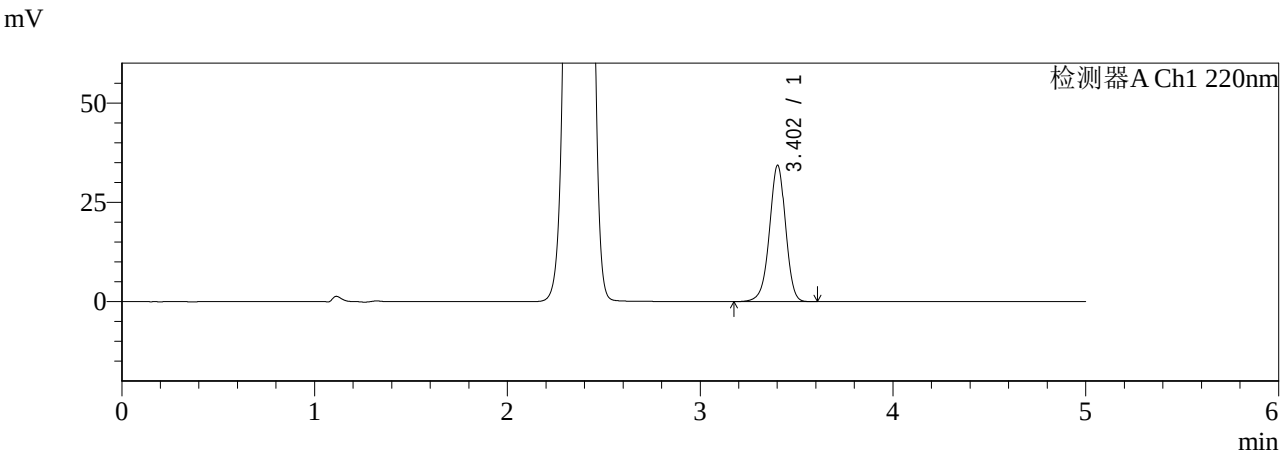

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	198841	100.000	34228	8158	0.960	--
总计		198841	100.000	34228			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	216421	100.000	36353	3649	1.006	--
总计		216421	100.000	36353			

图34 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-375-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 14:38:52
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

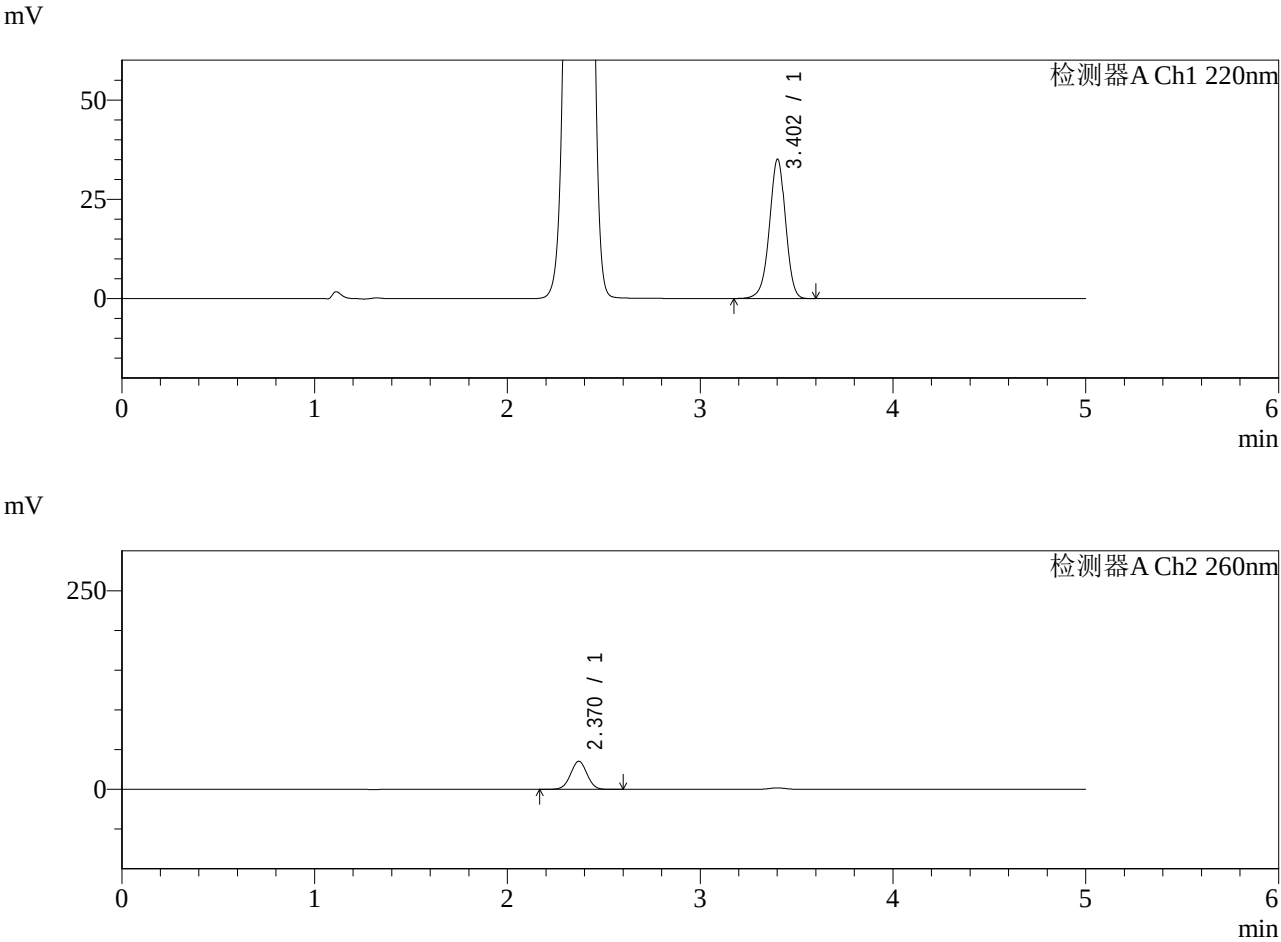

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	203383	100.000	35001	8154	0.960	--
总计		203383	100.000	35001			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	210361	100.000	35349	3651	1.007	--
总计		210361	100.000	35349			

图35 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-376-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 14:44:15
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

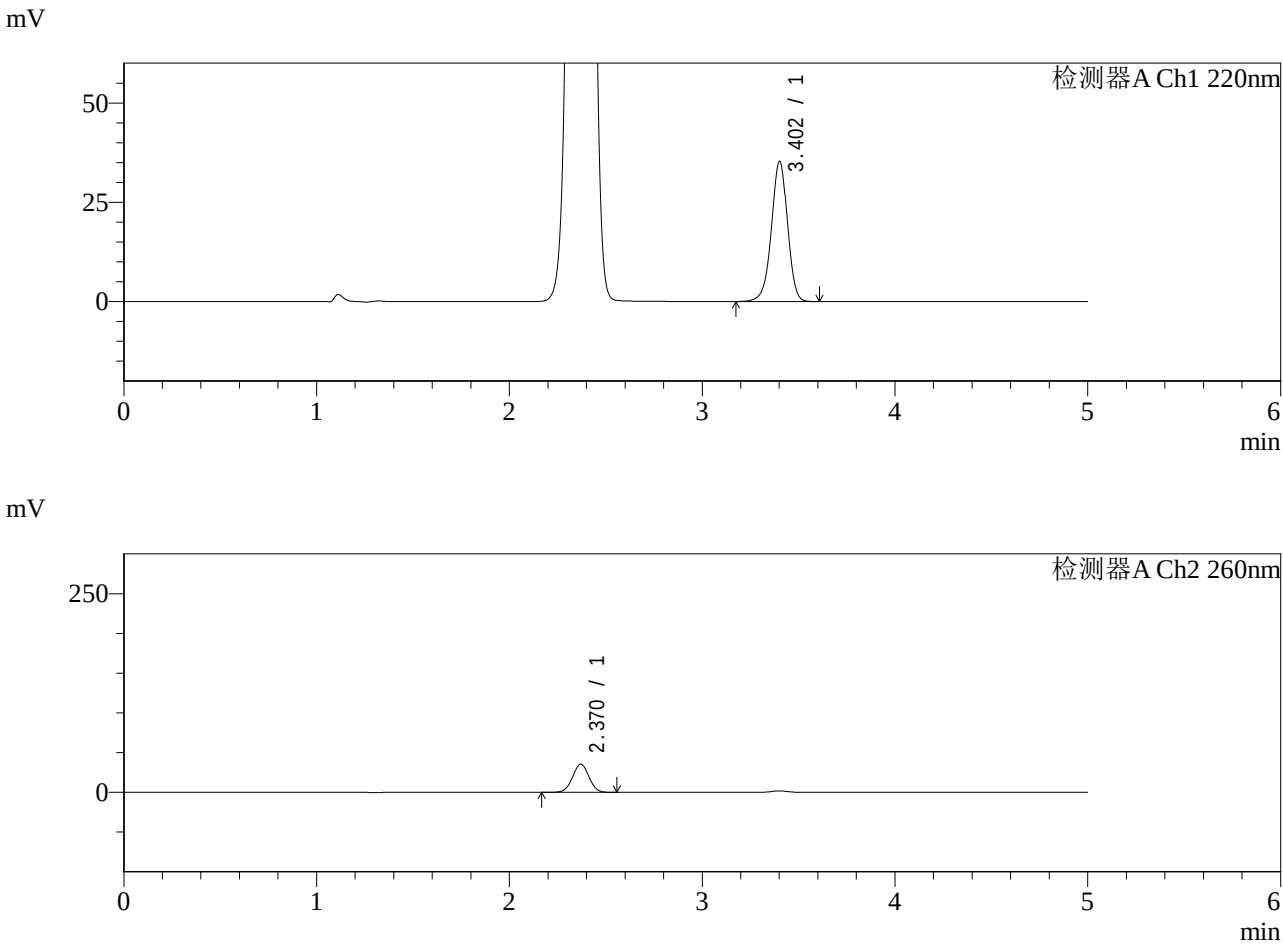

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	204561	100.000	35205	8154	0.959	--
总计		204561	100.000	35205			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	210817	100.000	35460	3659	1.007	--
总计		210817	100.000	35460			

图36 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-377-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 14:49:38
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

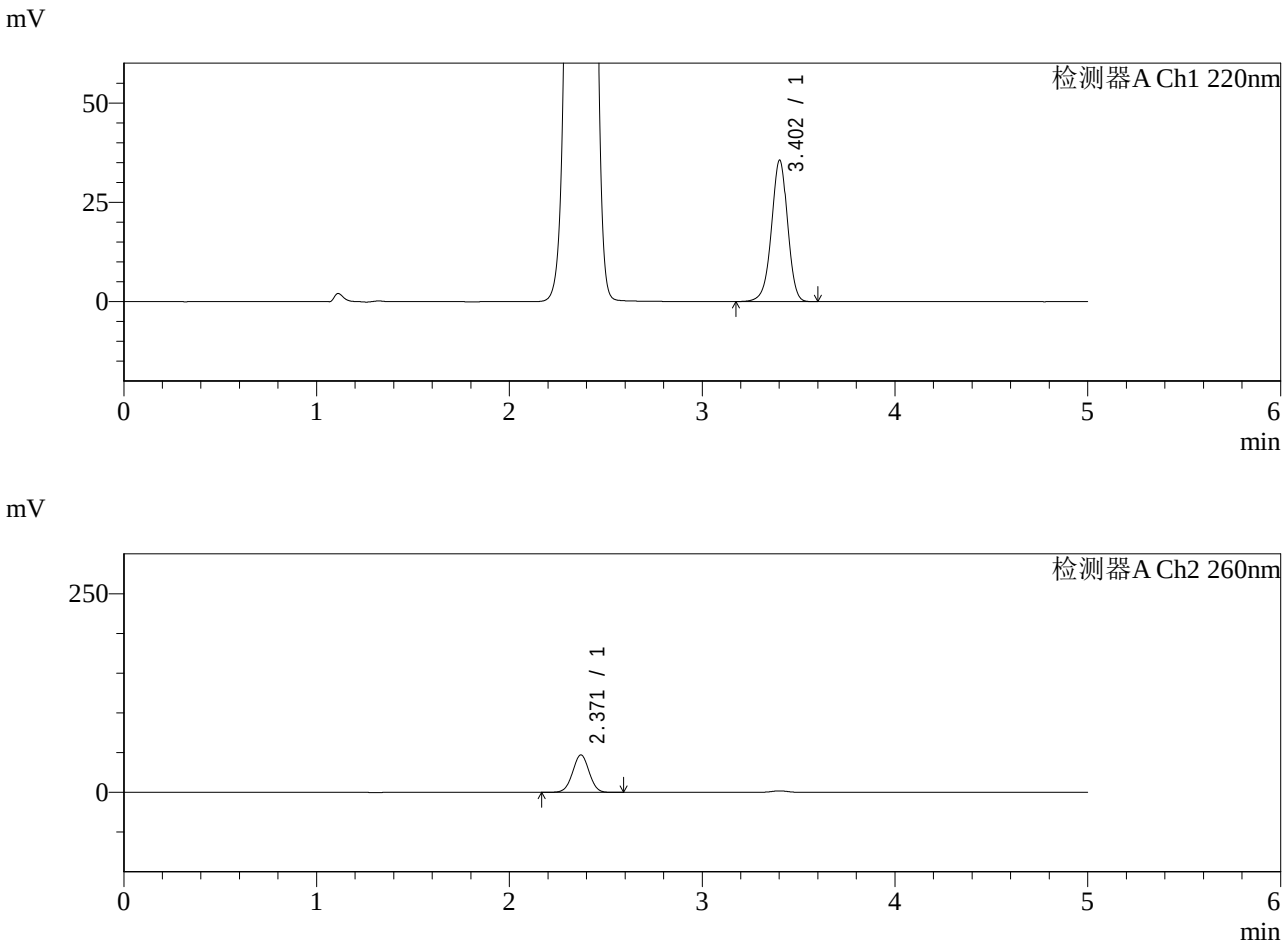

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	206319	100.000	35517	8154	0.960	--
总计		206319	100.000	35517			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	281360	100.000	47113	3623	1.003	--
总计		281360	100.000	47113			

图37 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-378-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 14:55:01
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

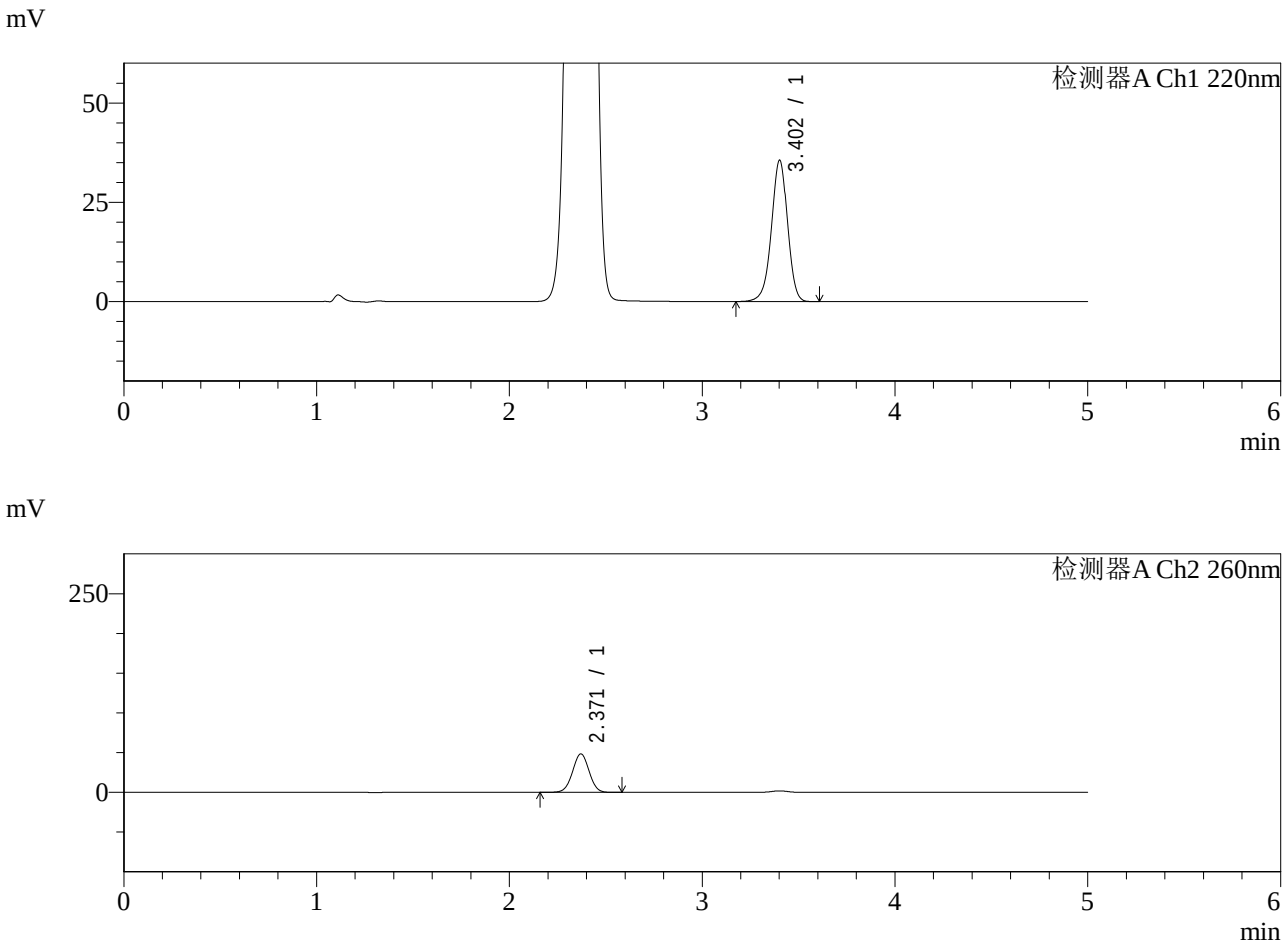

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	206058	100.000	35490	8167	0.959	--
总计		206058	100.000	35490			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	289290	100.000	48406	3620	1.002	--
总计		289290	100.000	48406			

图38 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-379-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 15:00:25
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

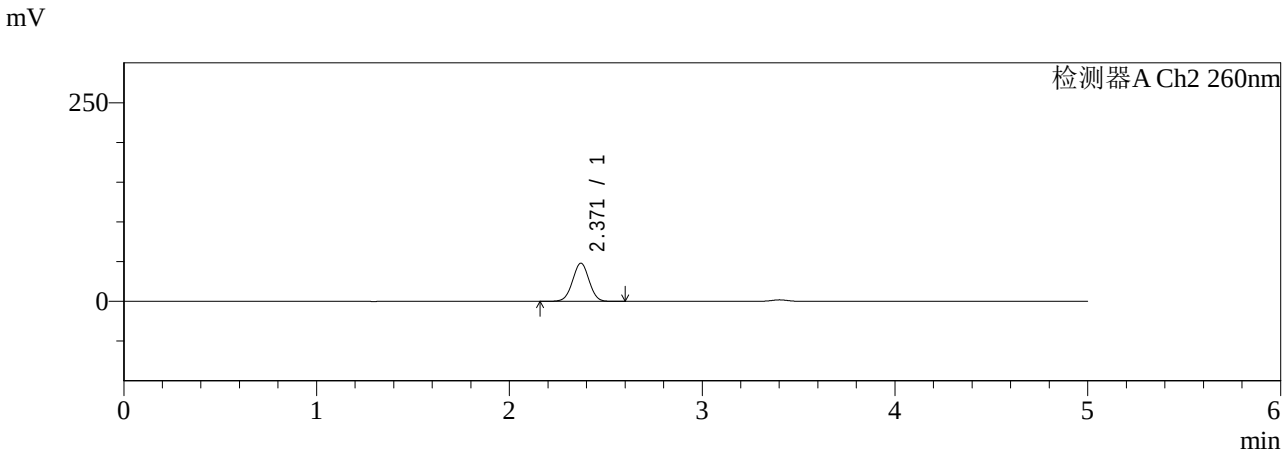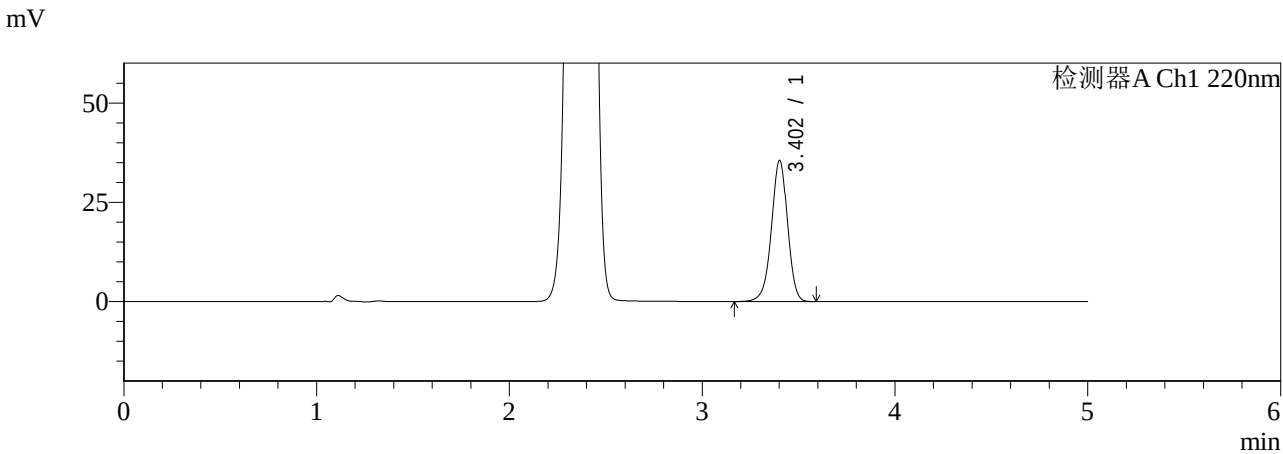

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	205778	100.000	35438	8158	0.960	--
总计		205778	100.000	35438			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	286873	100.000	48005	3618	1.002	--
总计		286873	100.000	48005			

图39 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-380-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 15:05:48
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

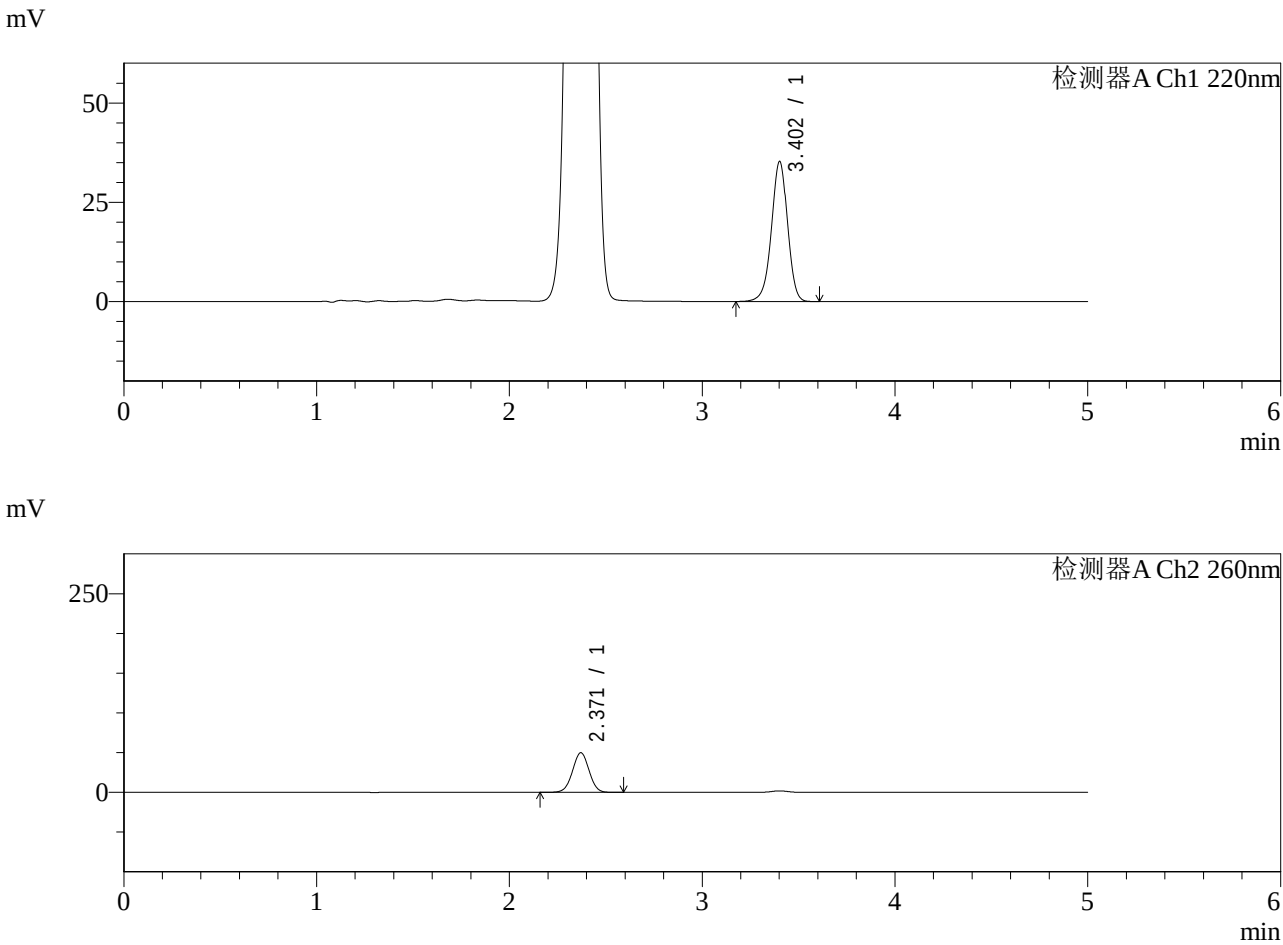

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	204273	100.000	35179	8152	0.960	--
总计		204273	100.000	35179			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	298522	100.000	49876	3606	1.003	--
总计		298522	100.000	49876			

图40 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-381-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 15:11:11
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

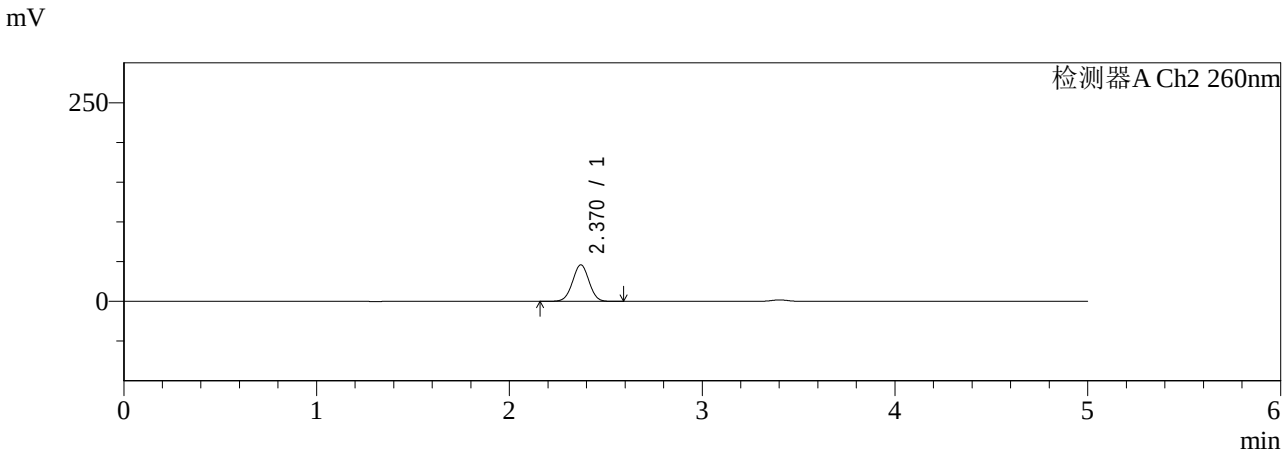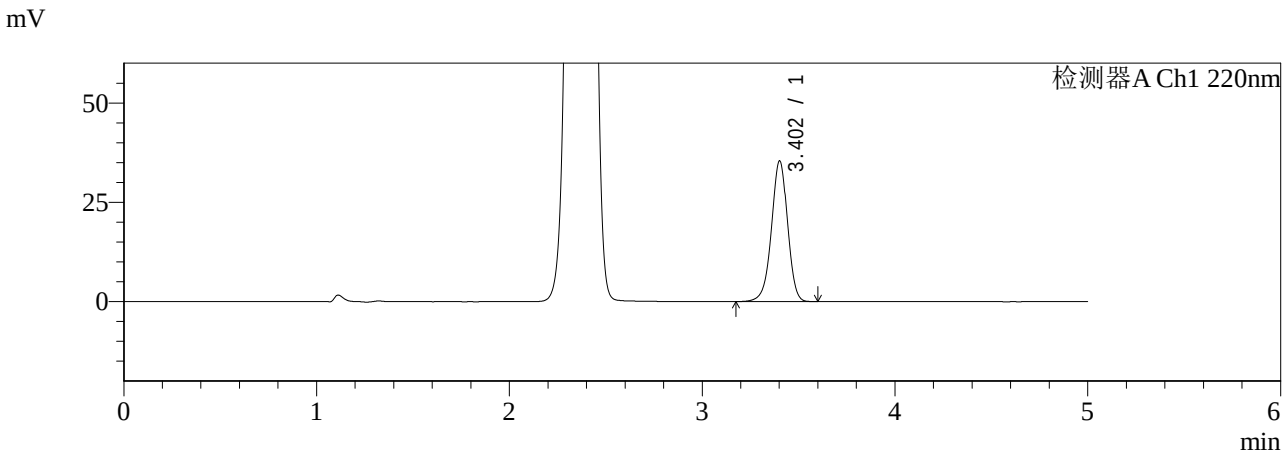

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	205133	100.000	35335	8166	0.960	--
总计		205133	100.000	35335			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	274739	100.000	45986	3623	1.004	--
总计		274739	100.000	45986			

图41 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-382-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 15:16:33
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

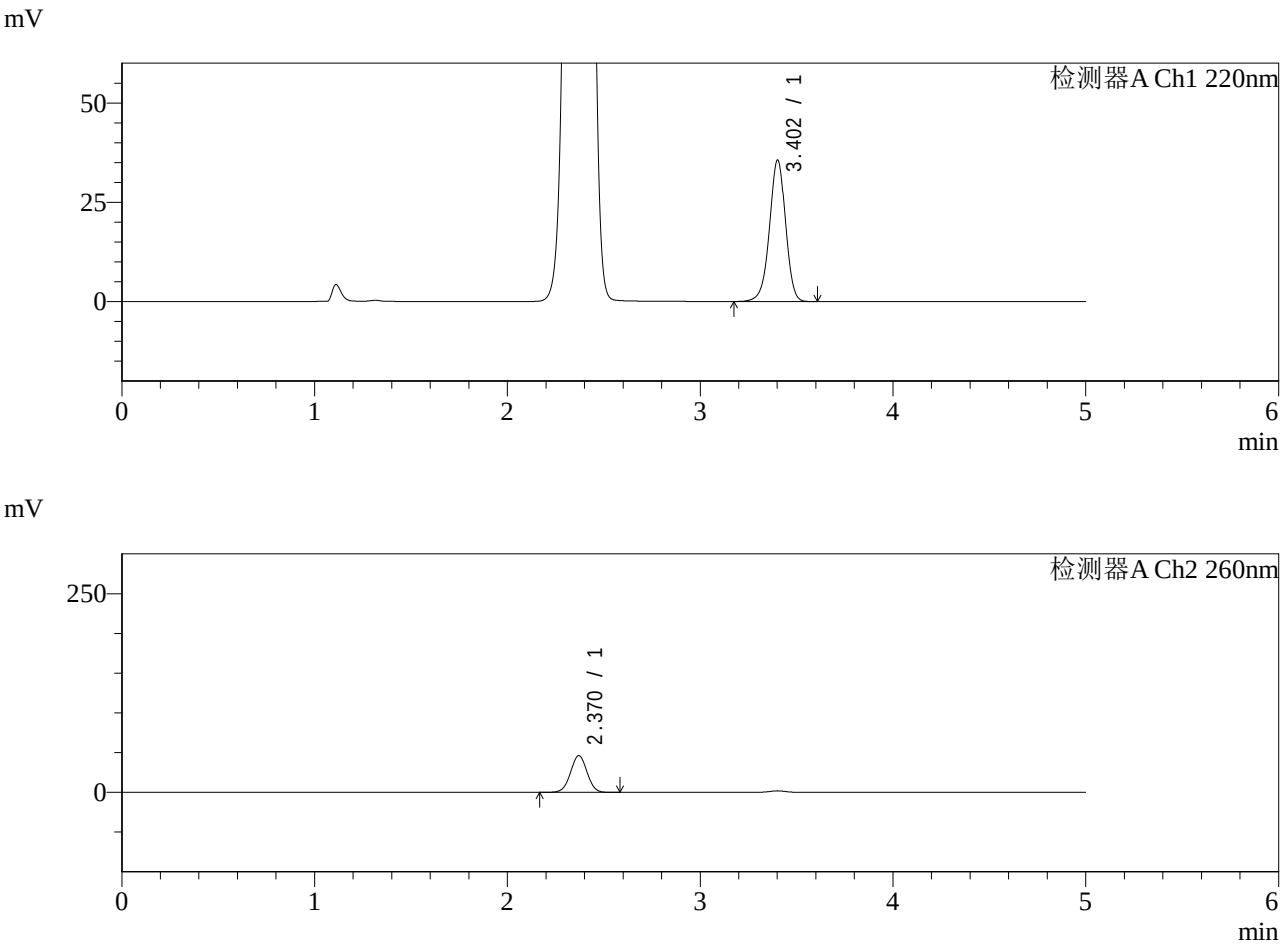

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	206402	100.000	35540	8151	0.960	--
总计		206402	100.000	35540			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	276192	100.000	46217	3617	1.003	--
总计		276192	100.000	46217			

图42 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-383-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 15:21:55
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

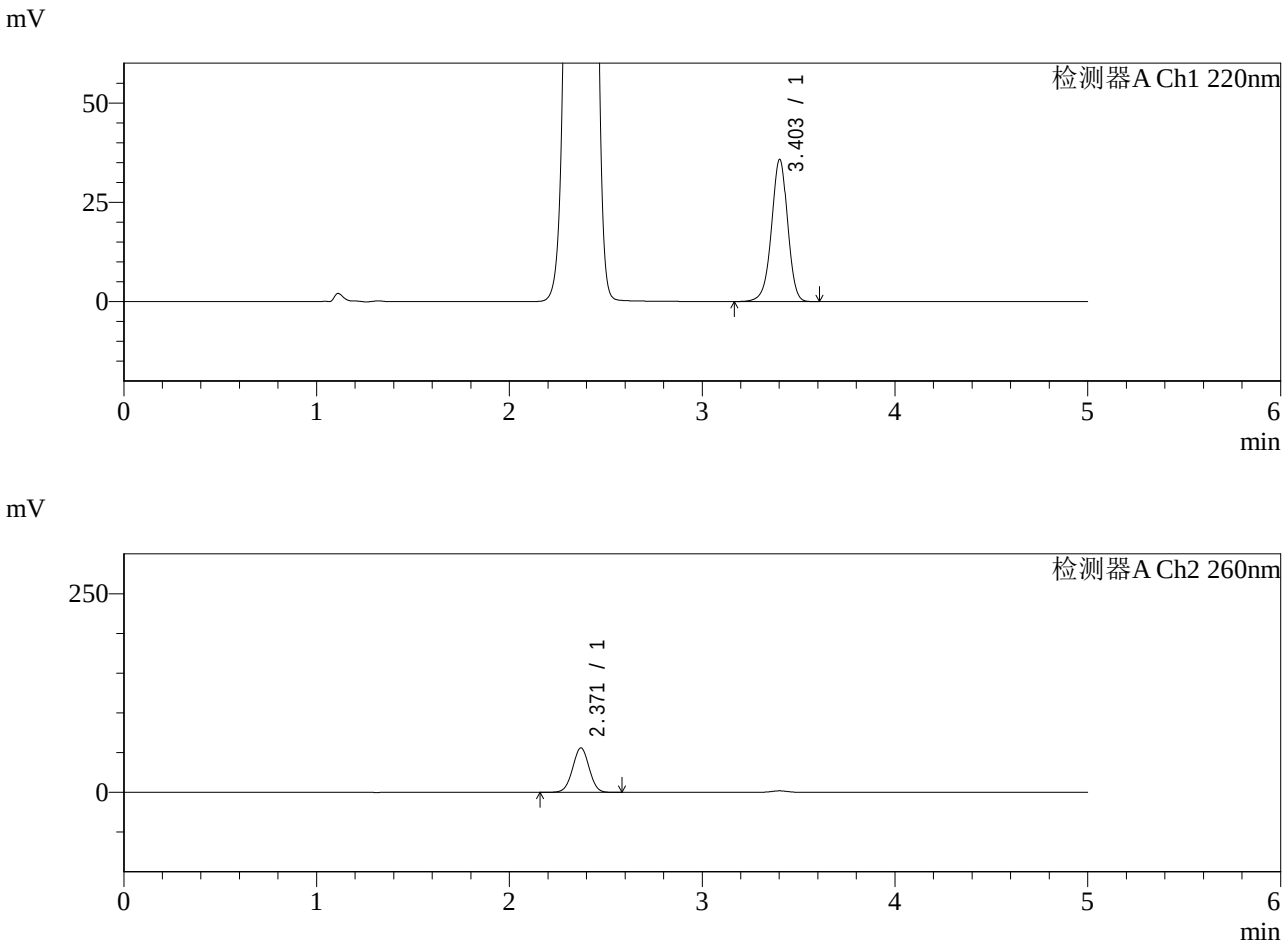

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.403	207565	100.000	35730	8160	0.959	--
总计		207565	100.000	35730			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	335119	100.000	55950	3601	1.001	--
总计		335119	100.000	55950			

图43 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-384-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 15:27:17
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

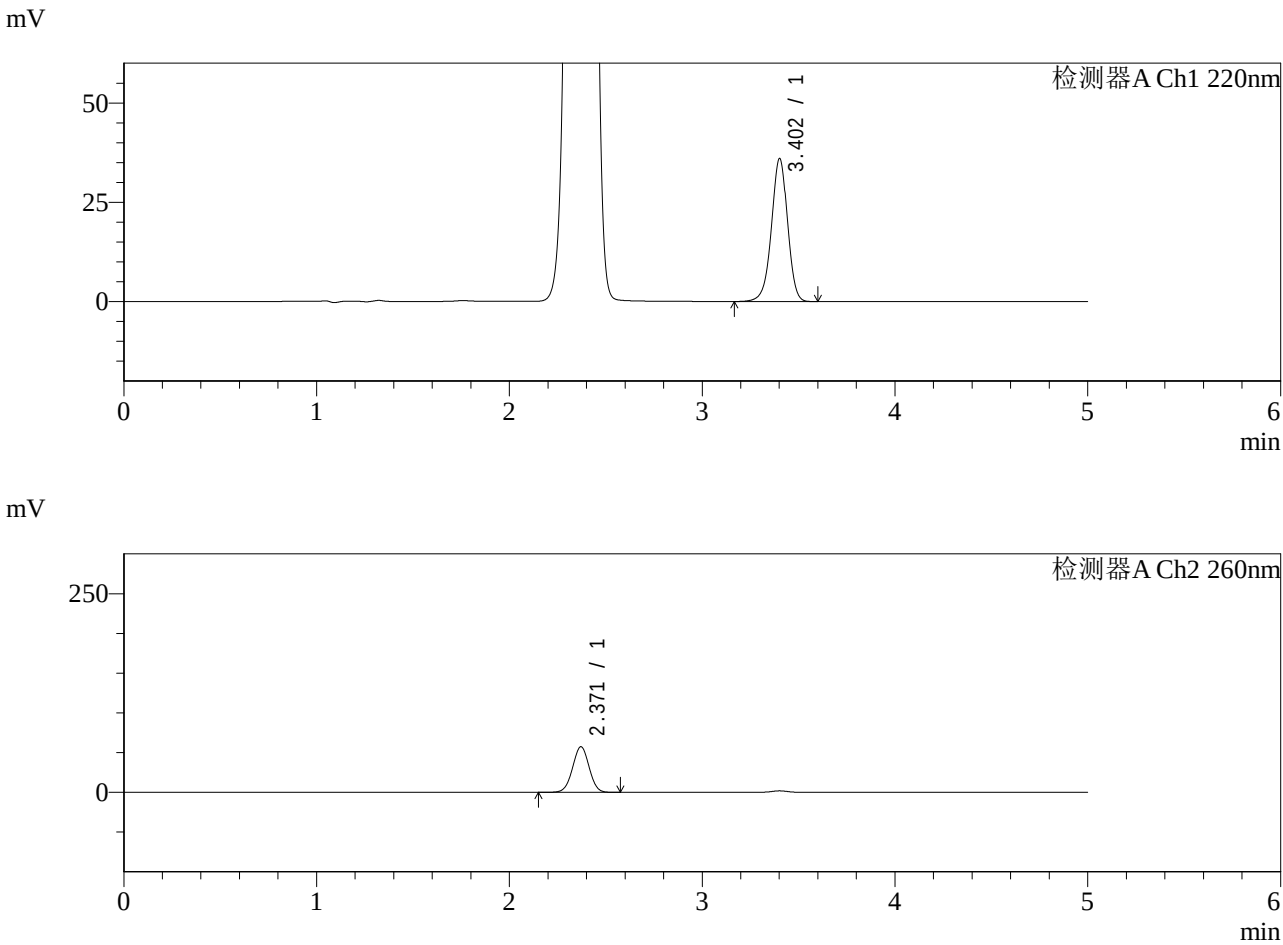

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	208791	100.000	35912	8148	0.960	--
总计		208791	100.000	35912			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	344206	100.000	57425	3596	1.000	--
总计		344206	100.000	57425			

图44 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-385-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 15:32:39
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

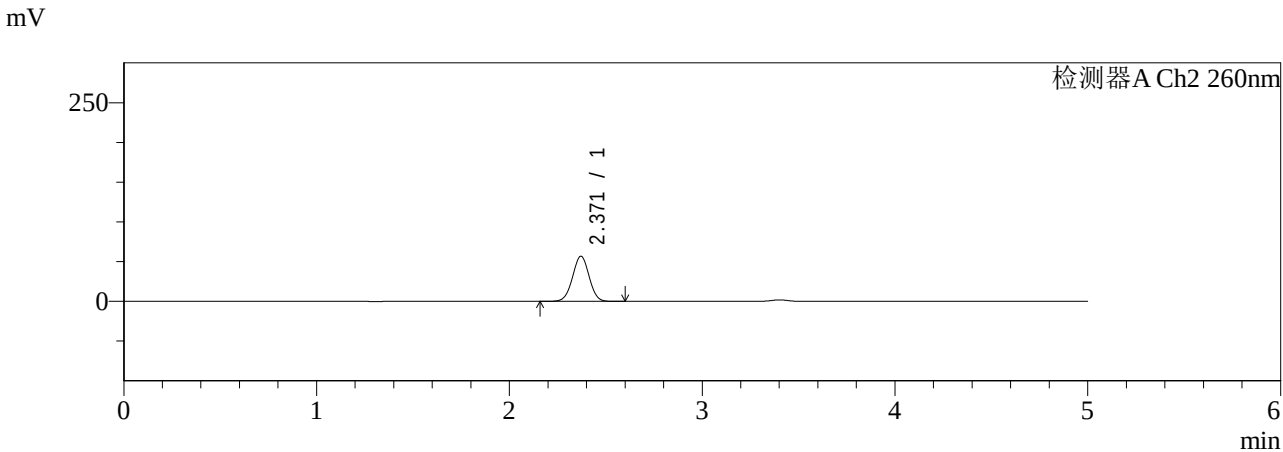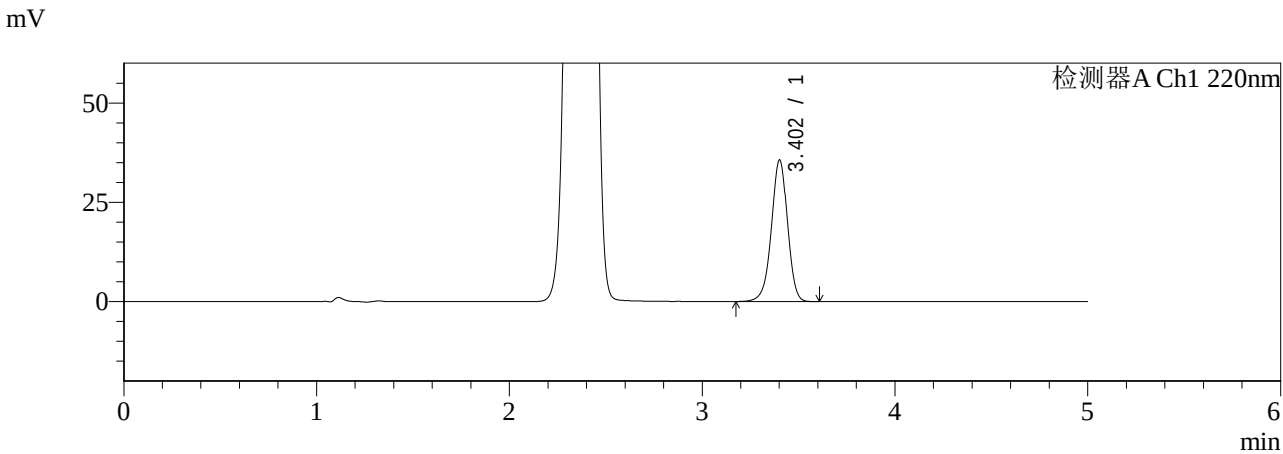

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	206540	100.000	35538	8165	0.959	--
总计		206540	100.000	35538			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	340636	100.000	56857	3599	1.001	--
总计		340636	100.000	56857			

图45 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-386-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 15:38:02
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

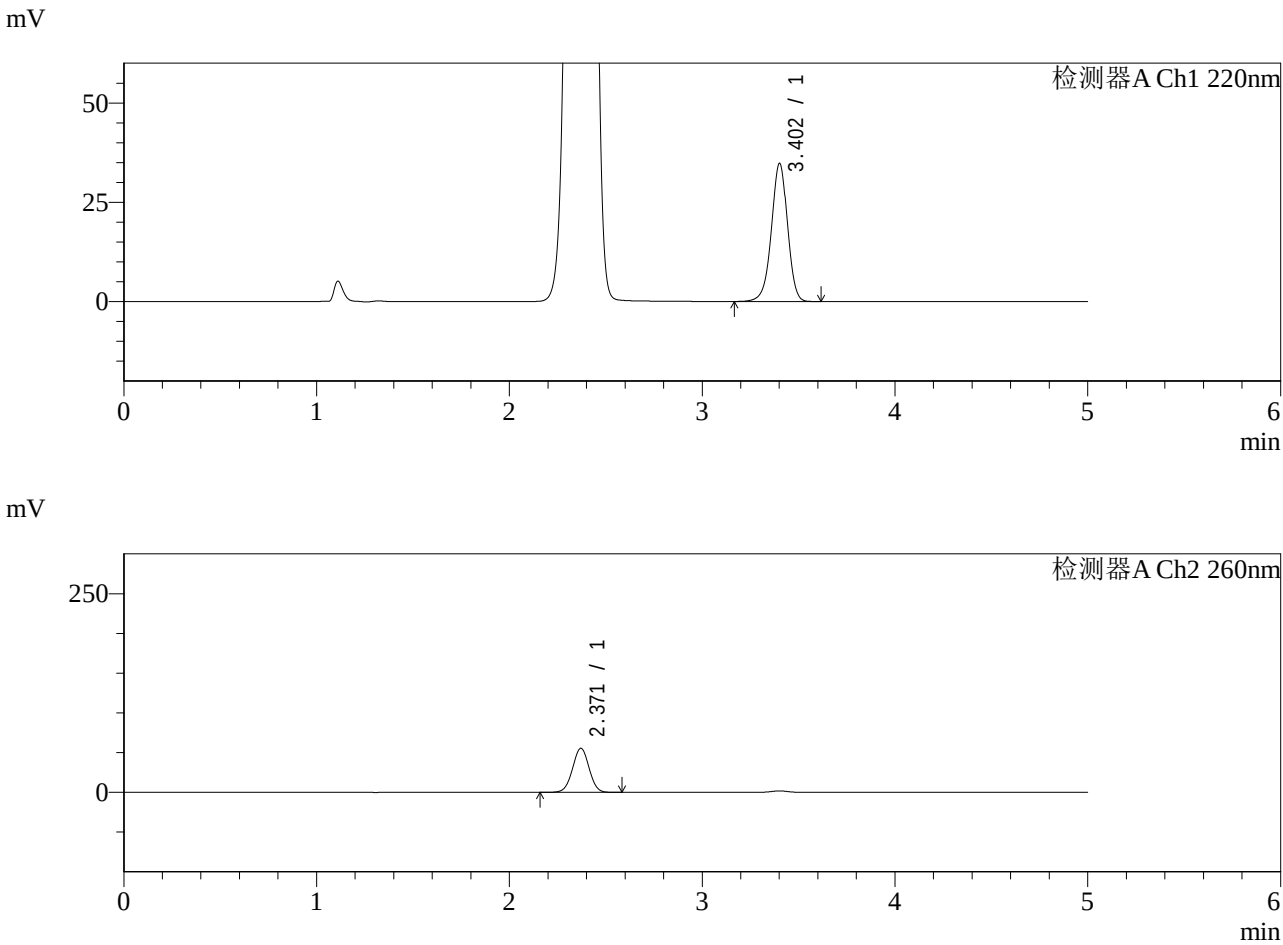

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	201676	100.000	34679	8155	0.960	--
总计		201676	100.000	34679			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	332176	100.000	55455	3602	1.001	--
总计		332176	100.000	55455			

图46 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-387-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 15:43:25
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

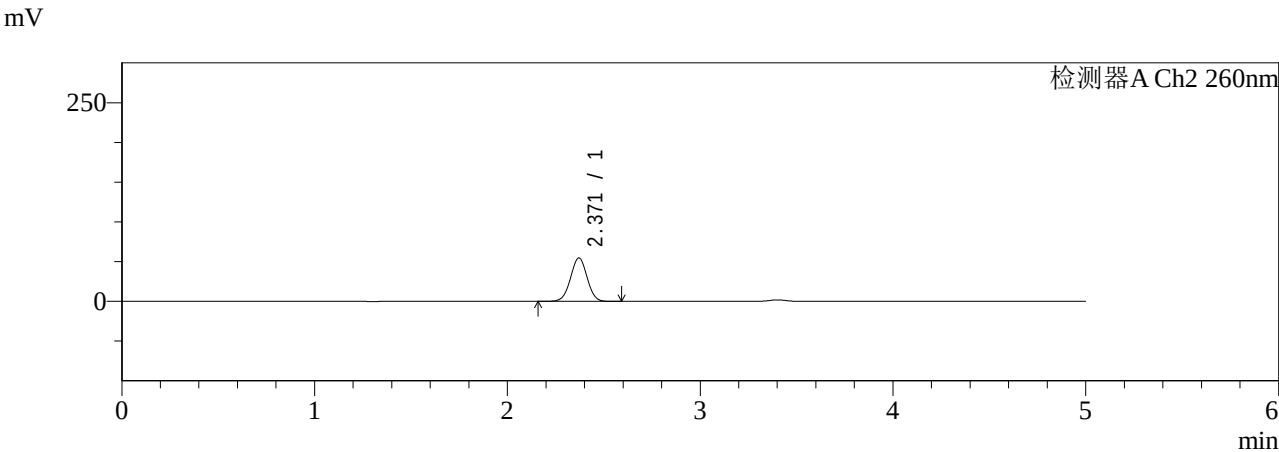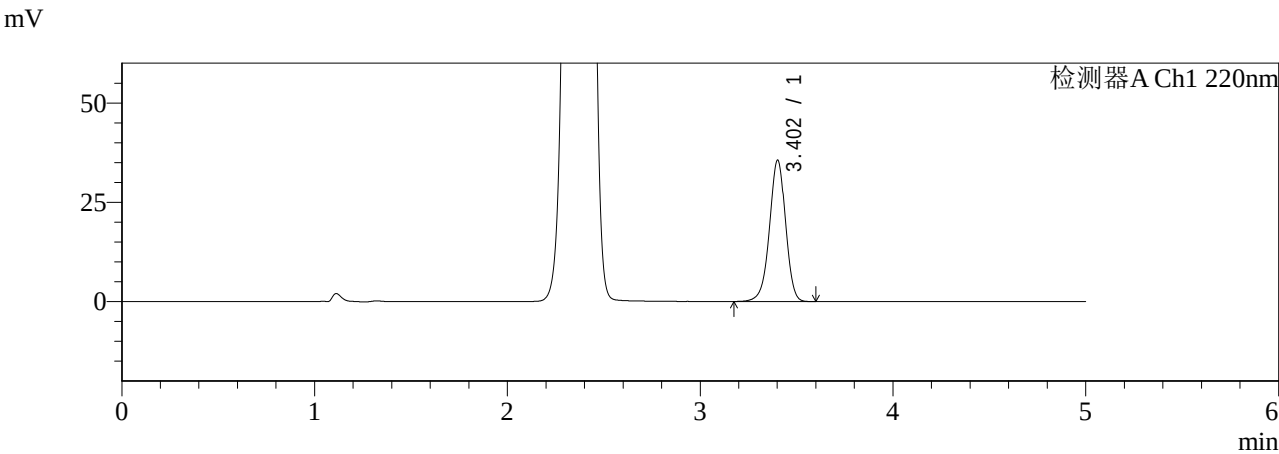

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	206180	100.000	35500	8157	0.959	--
总计		206180	100.000	35500			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	327346	100.000	54649	3599	1.001	--
总计		327346	100.000	54649			

图47 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-388-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 15:48:48
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

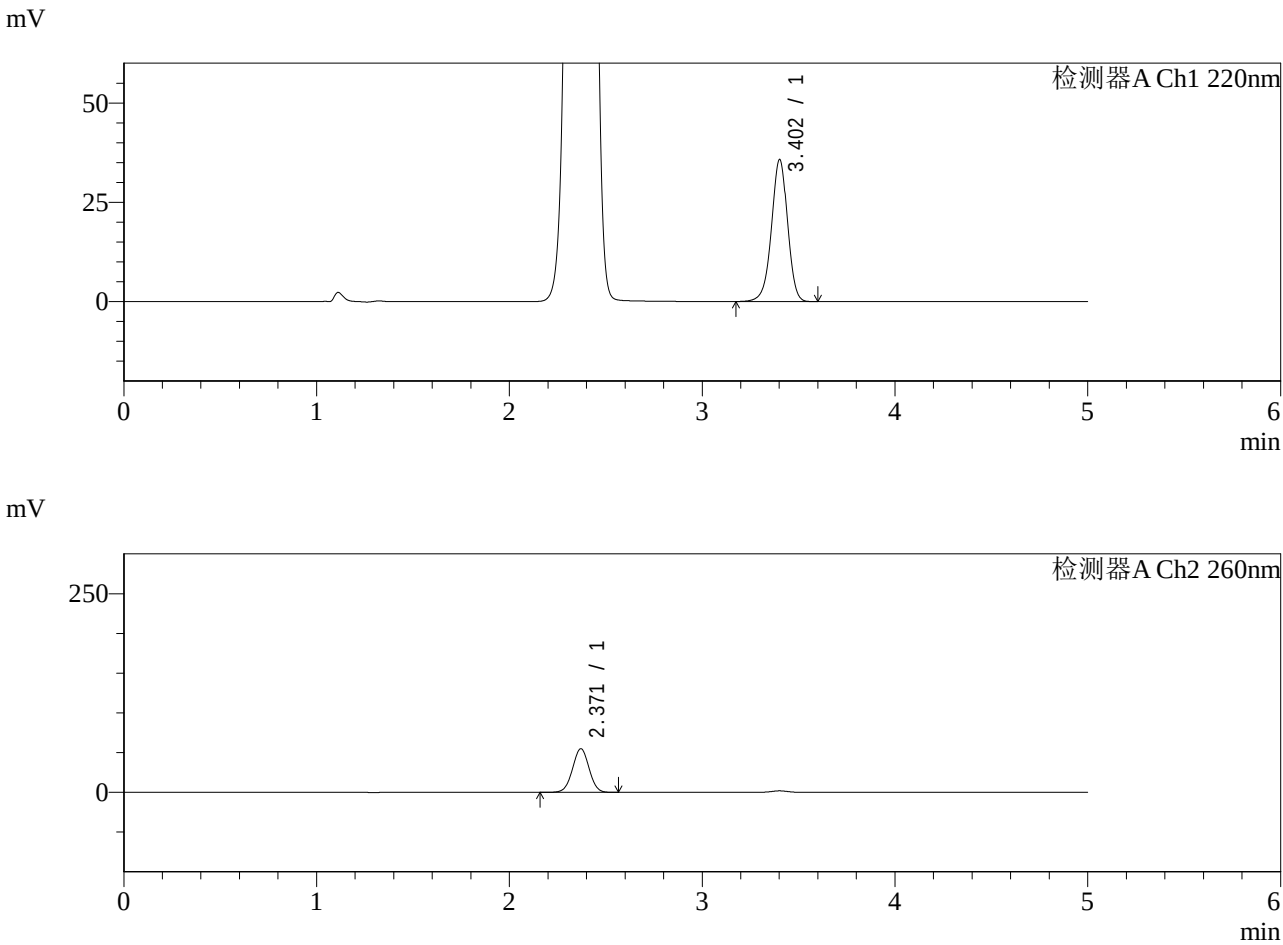

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	207044	100.000	35665	8170	0.960	--
总计		207044	100.000	35665			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	328846	100.000	54905	3600	1.001	--
总计		328846	100.000	54905			

图48 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-389-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 15:54:12
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

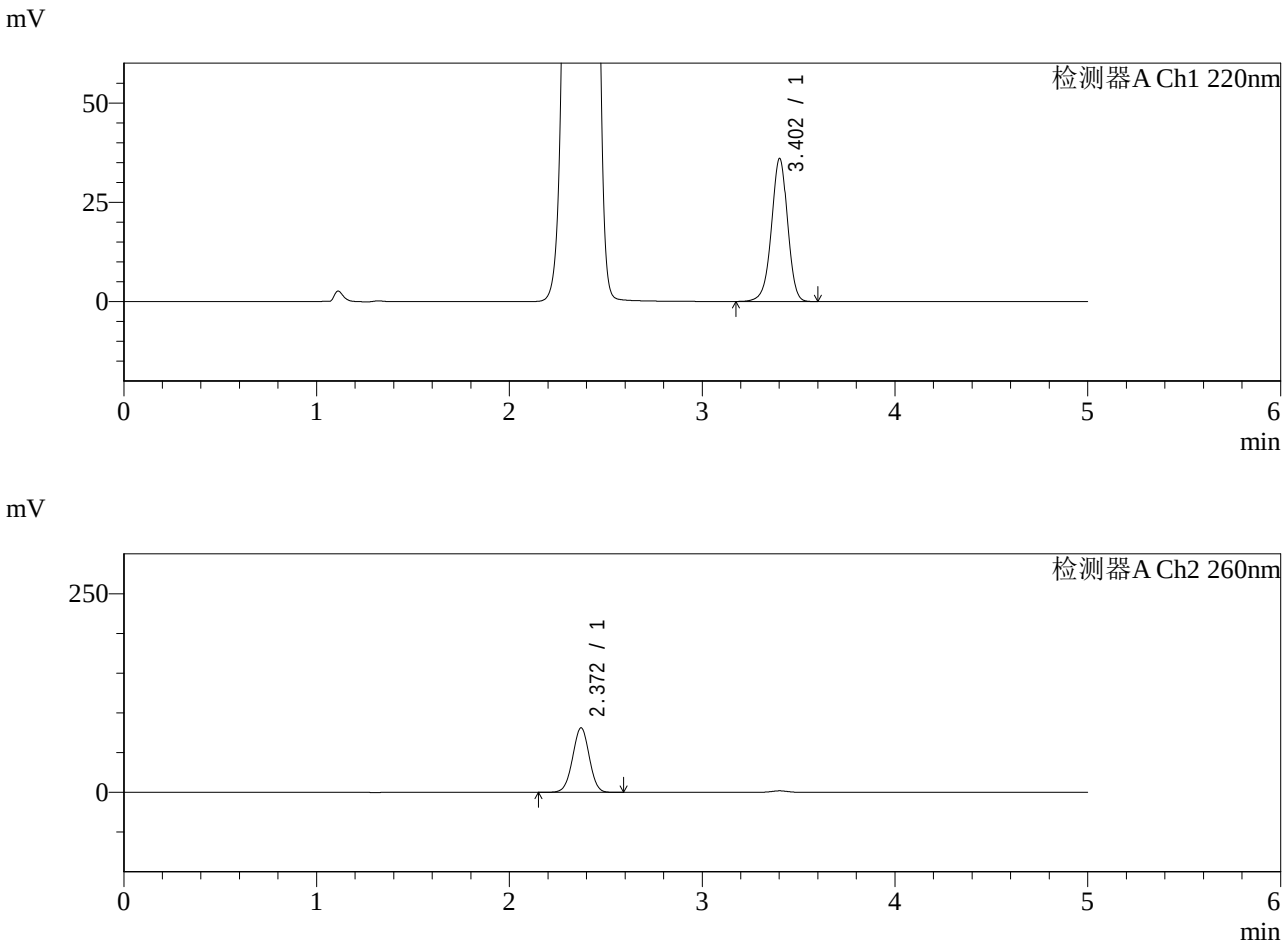

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	208789	100.000	35933	8155	0.961	--
总计		208789	100.000	35933			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	489624	100.000	81270	3556	0.993	--
总计		489624	100.000	81270			

图49 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-390-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 15:59:36
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

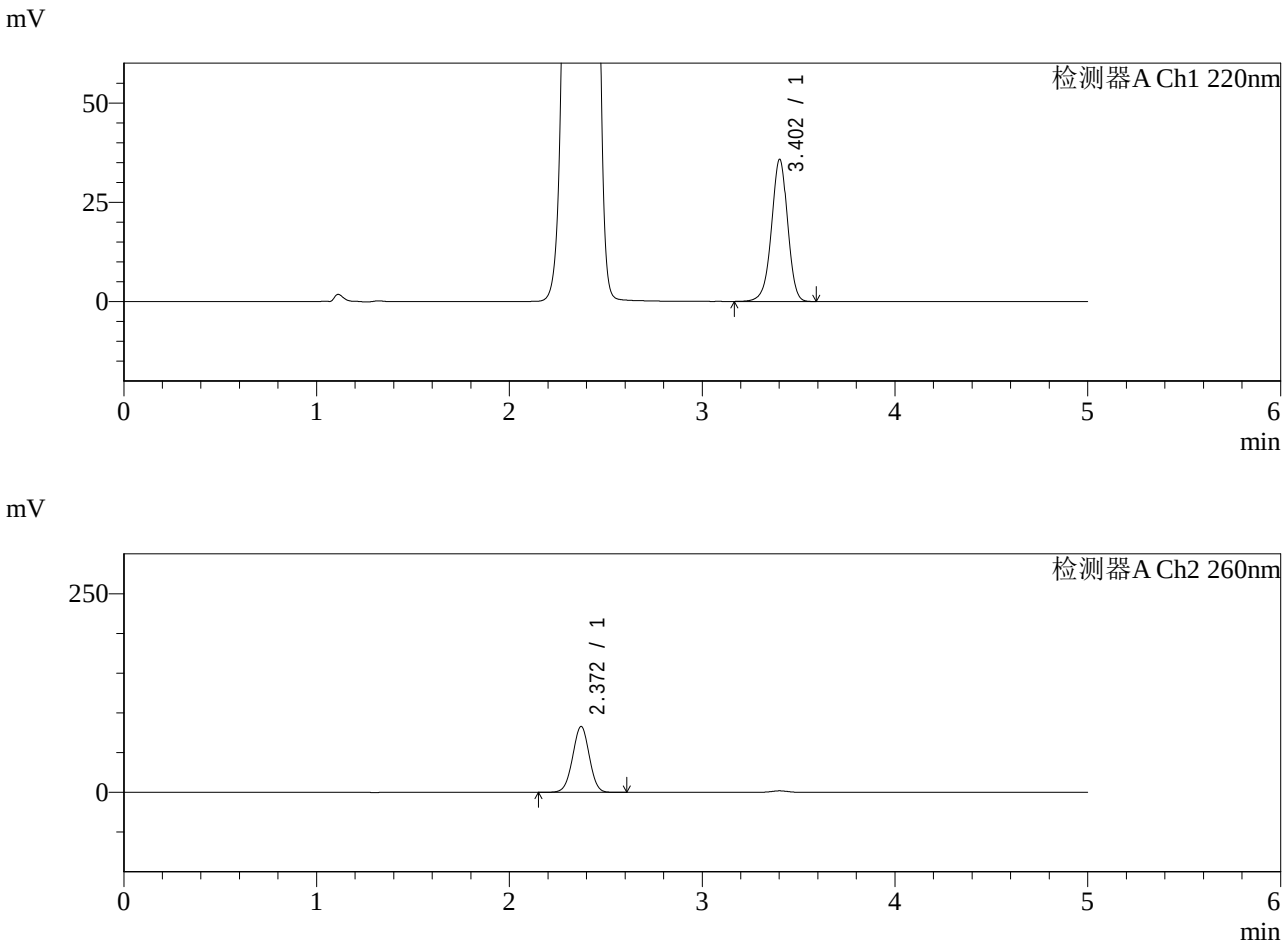

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	207407	100.000	35711	8160	0.960	--
总计		207407	100.000	35711			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	500359	100.000	82993	3554	0.993	--
总计		500359	100.000	82993			

图50 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片2
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-391-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 16:05:00
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

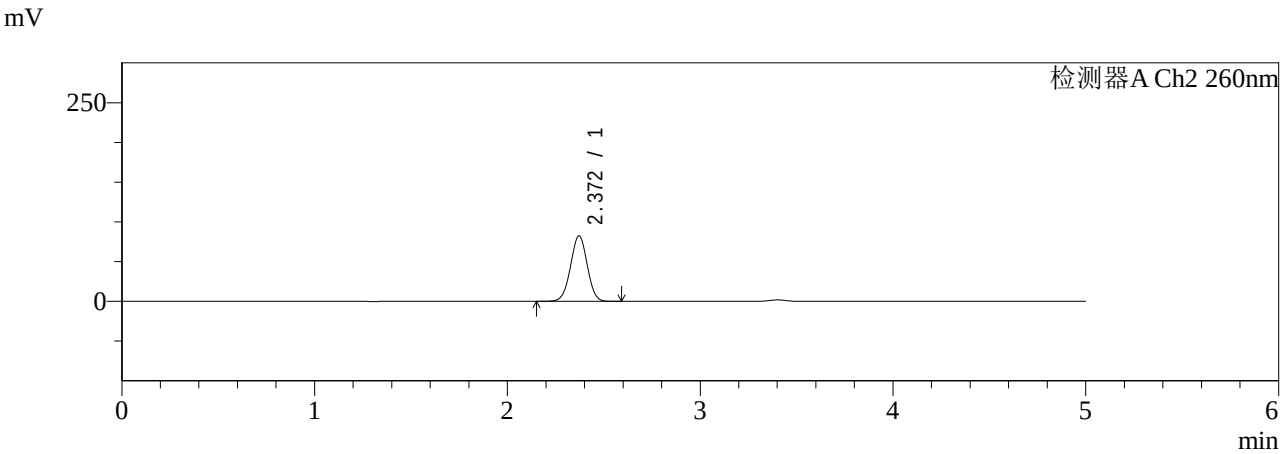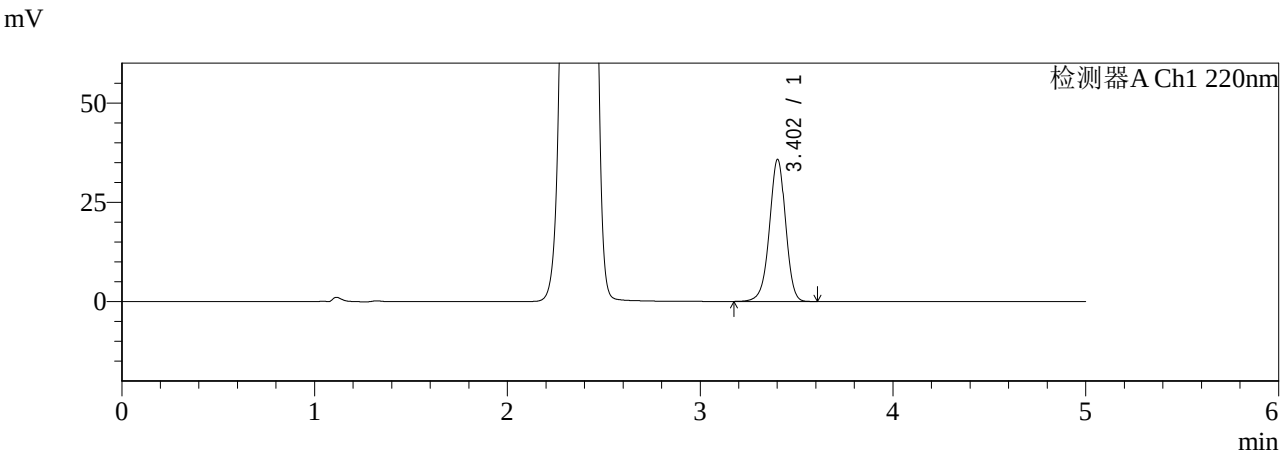

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	207429	100.000	35696	8148	0.961	--
总计		207429	100.000	35696			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	497367	100.000	82556	3555	0.993	--
总计		497367	100.000	82556			

图51 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片3
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-392-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 16:10:23
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:16:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

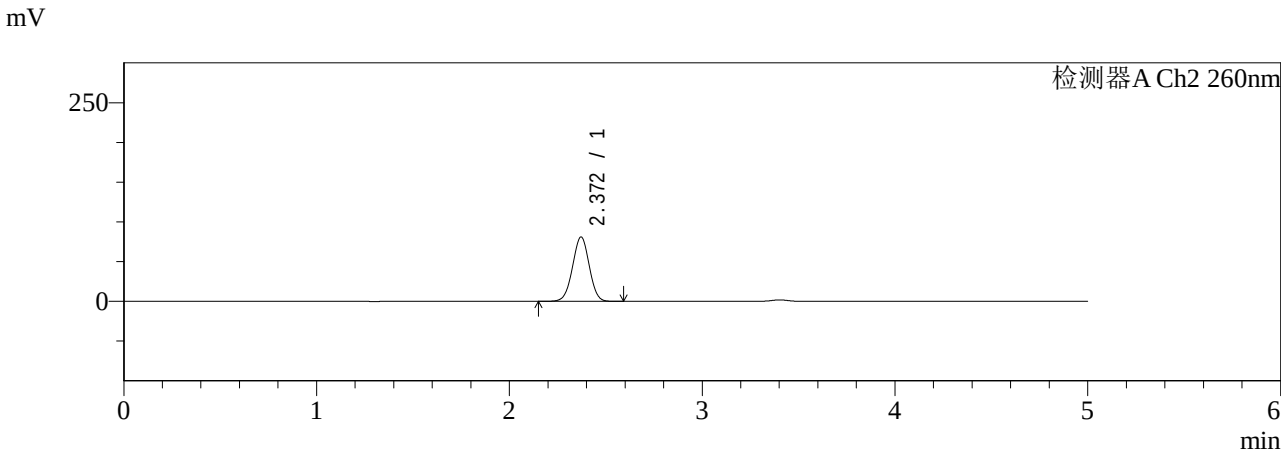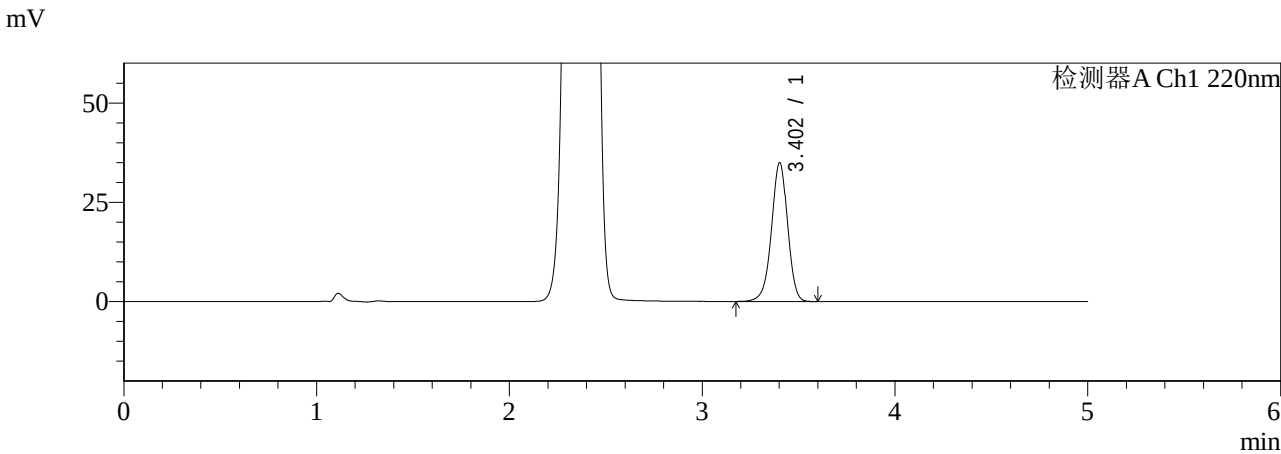

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	202521	100.000	34880	8163	0.960	--
总计		202521	100.000	34880			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	488480	100.000	81066	3553	0.994	--
总计		488480	100.000	81066			

图52 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-393-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 16:15:46
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

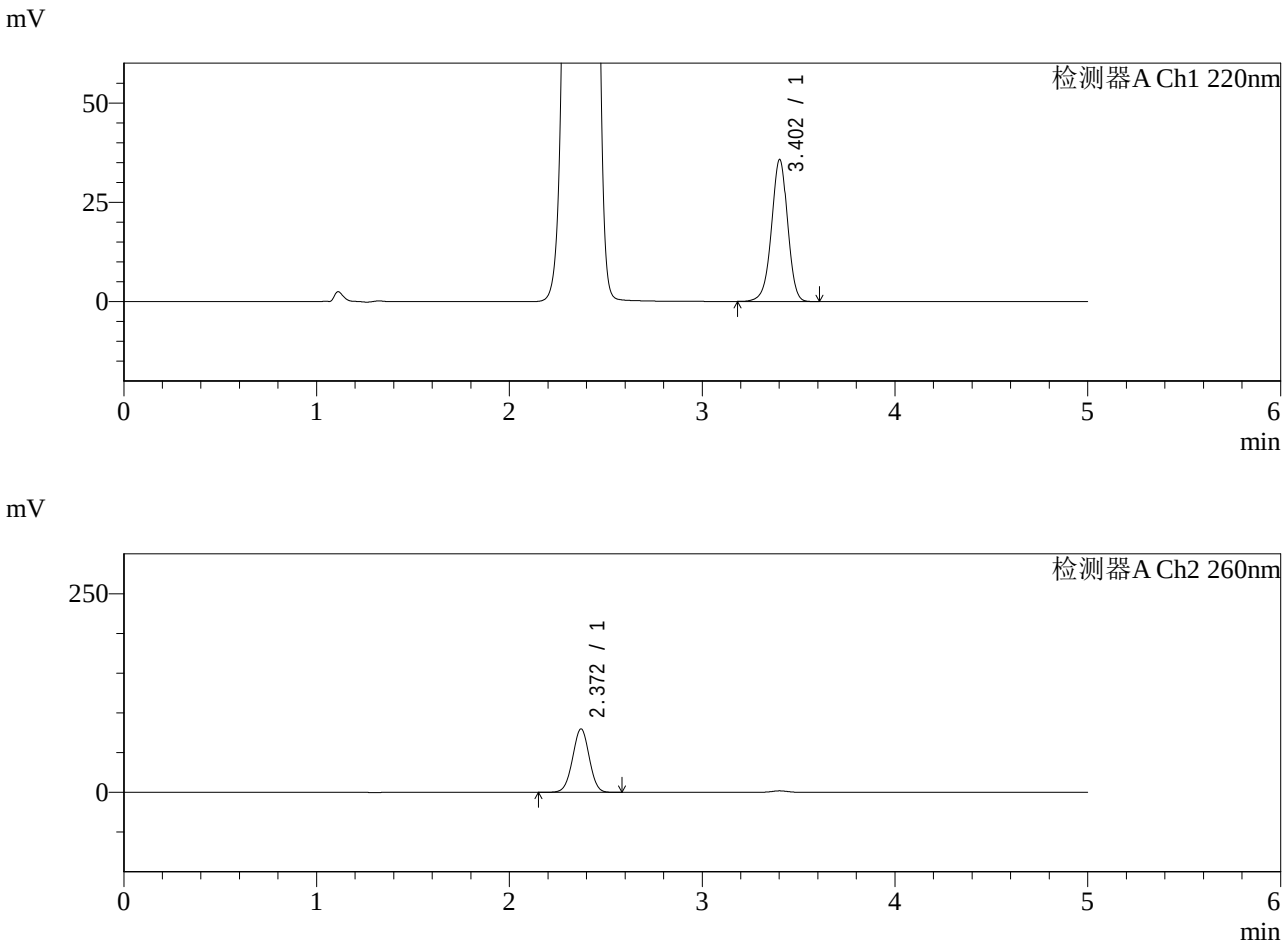

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	207033	100.000	35675	8163	0.961	--
总计		207033	100.000	35675			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	481444	100.000	79890	3554	0.994	--
总计		481444	100.000	79890			

图53 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片5
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-394-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 16:21:09
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

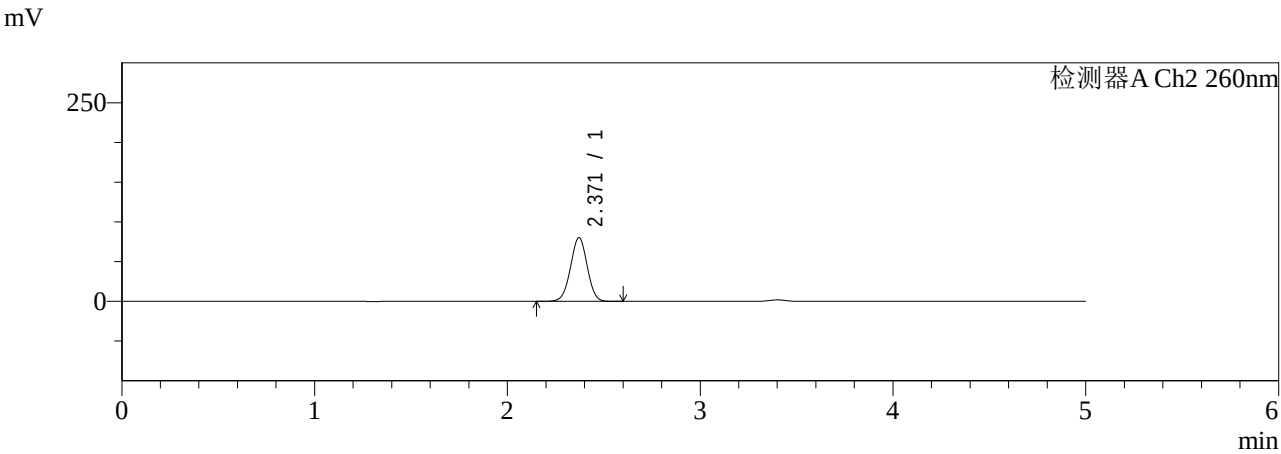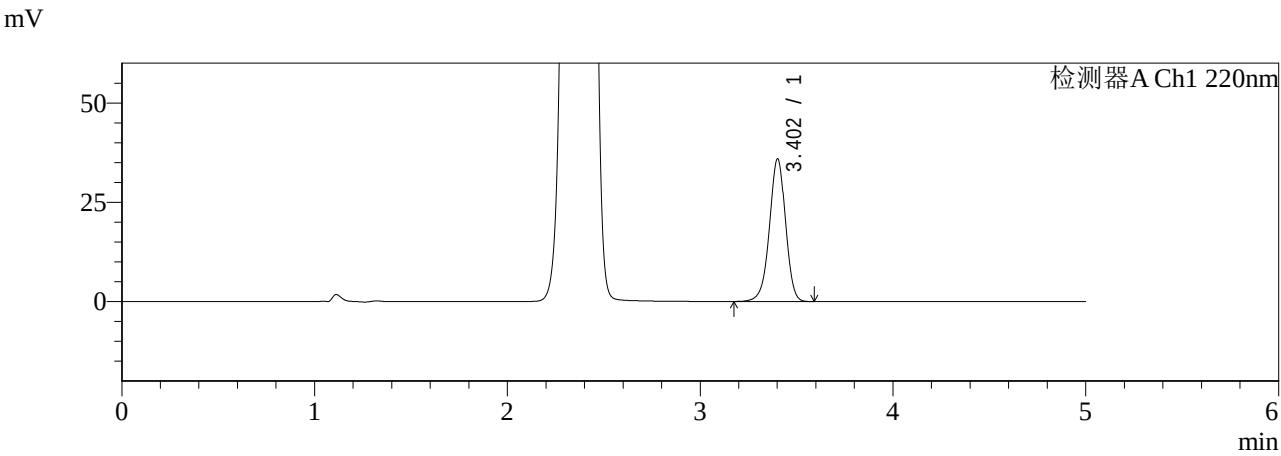

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	208077	100.000	35820	8153	0.961	--
总计		208077	100.000	35820			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	483673	100.000	80248	3551	0.994	--
总计		483673	100.000	80248			

图54 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-395-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-180min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 16:26:33
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

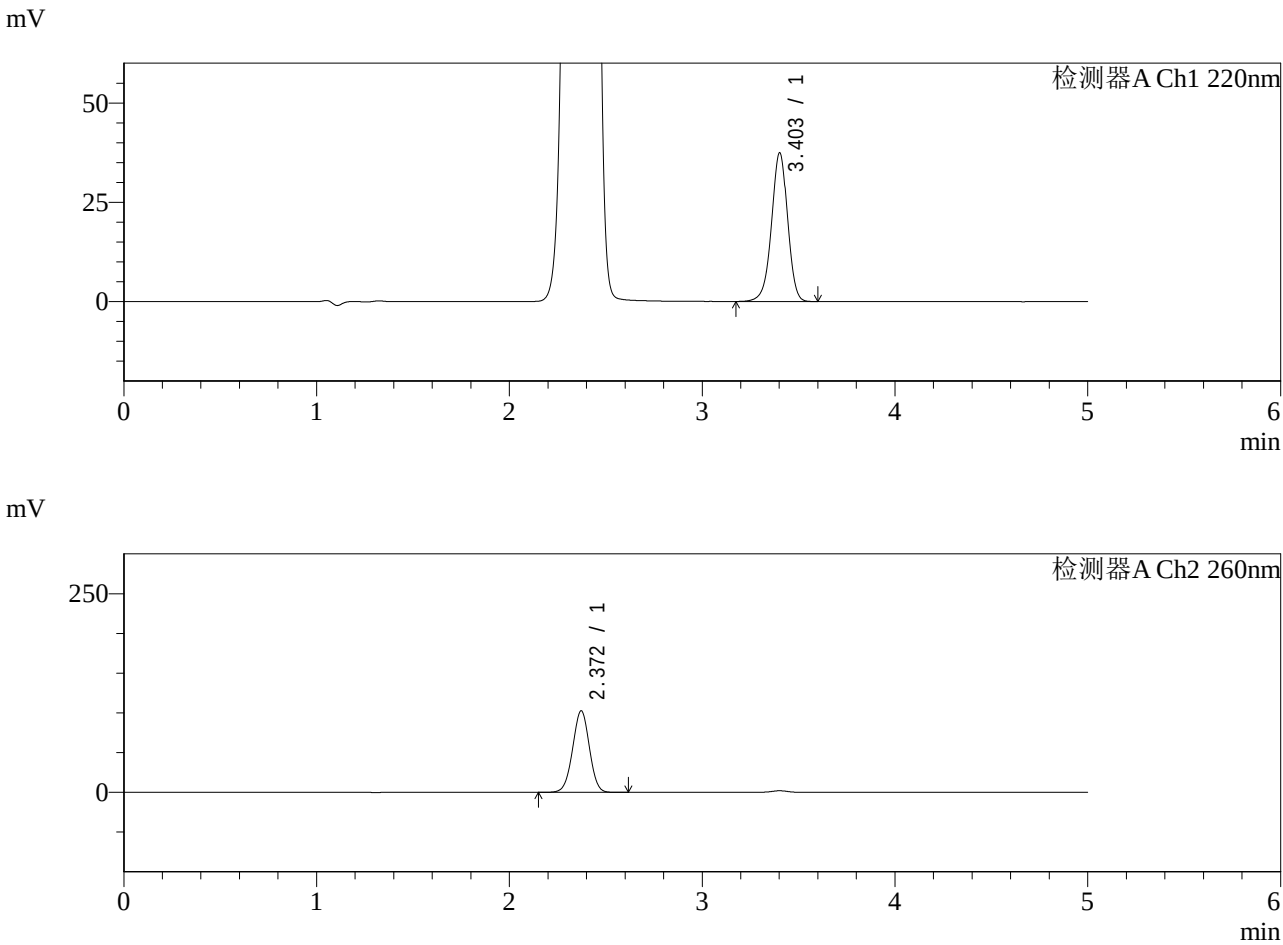

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.403	217185	100.000	37380	8158	0.961	--
总计		217185	100.000	37380			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	621614	100.000	102648	3525	0.987	--
总计		621614	100.000	102648			

图55 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-180min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-396-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-180min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 16:31:57
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

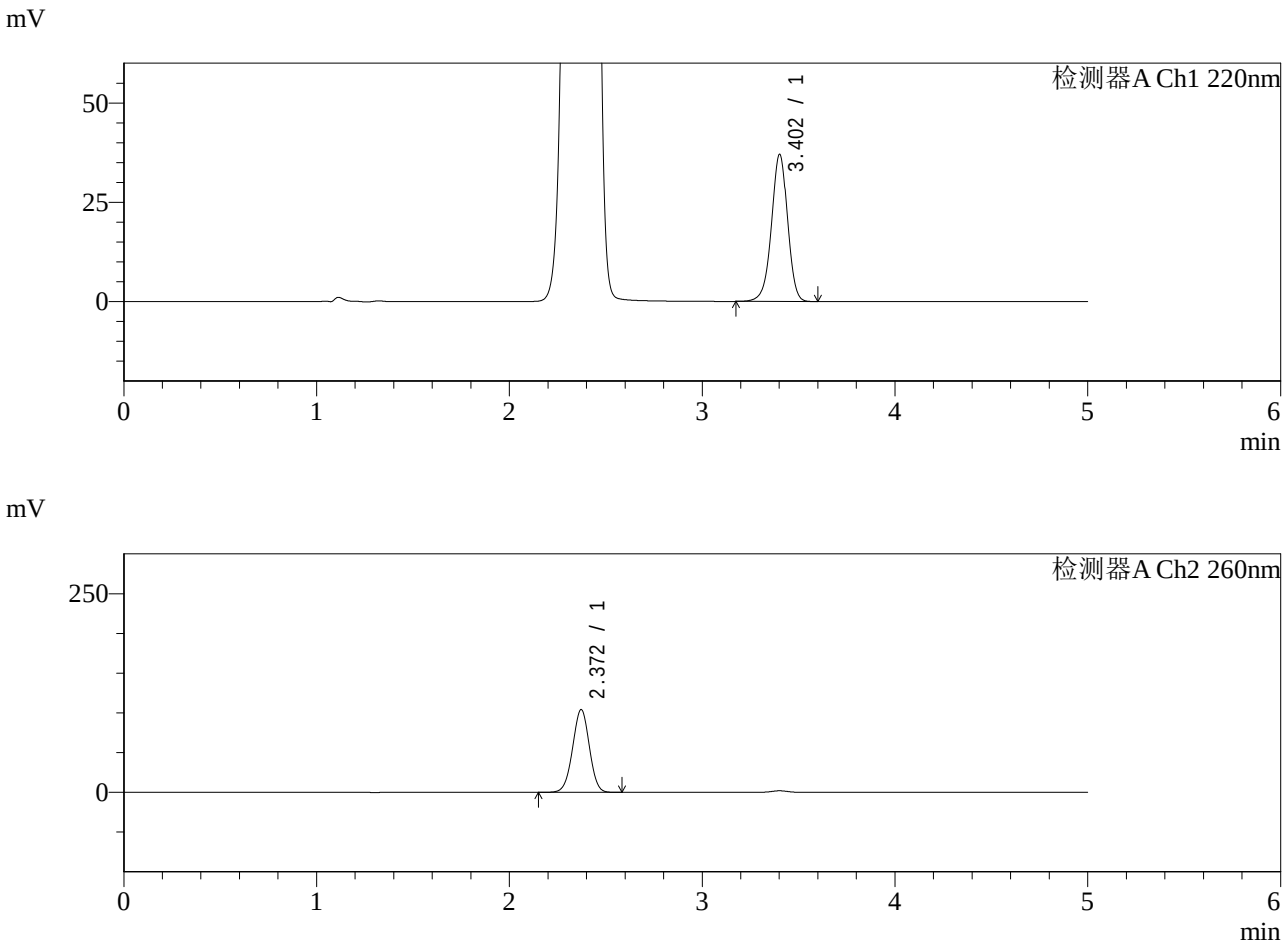

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	214593	100.000	36958	8153	0.961	--
总计		214593	100.000	36958			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	631040	100.000	104208	3525	0.987	--
总计		631040	100.000	104208			

图56 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-180min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-397-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-180min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 16:37:19
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

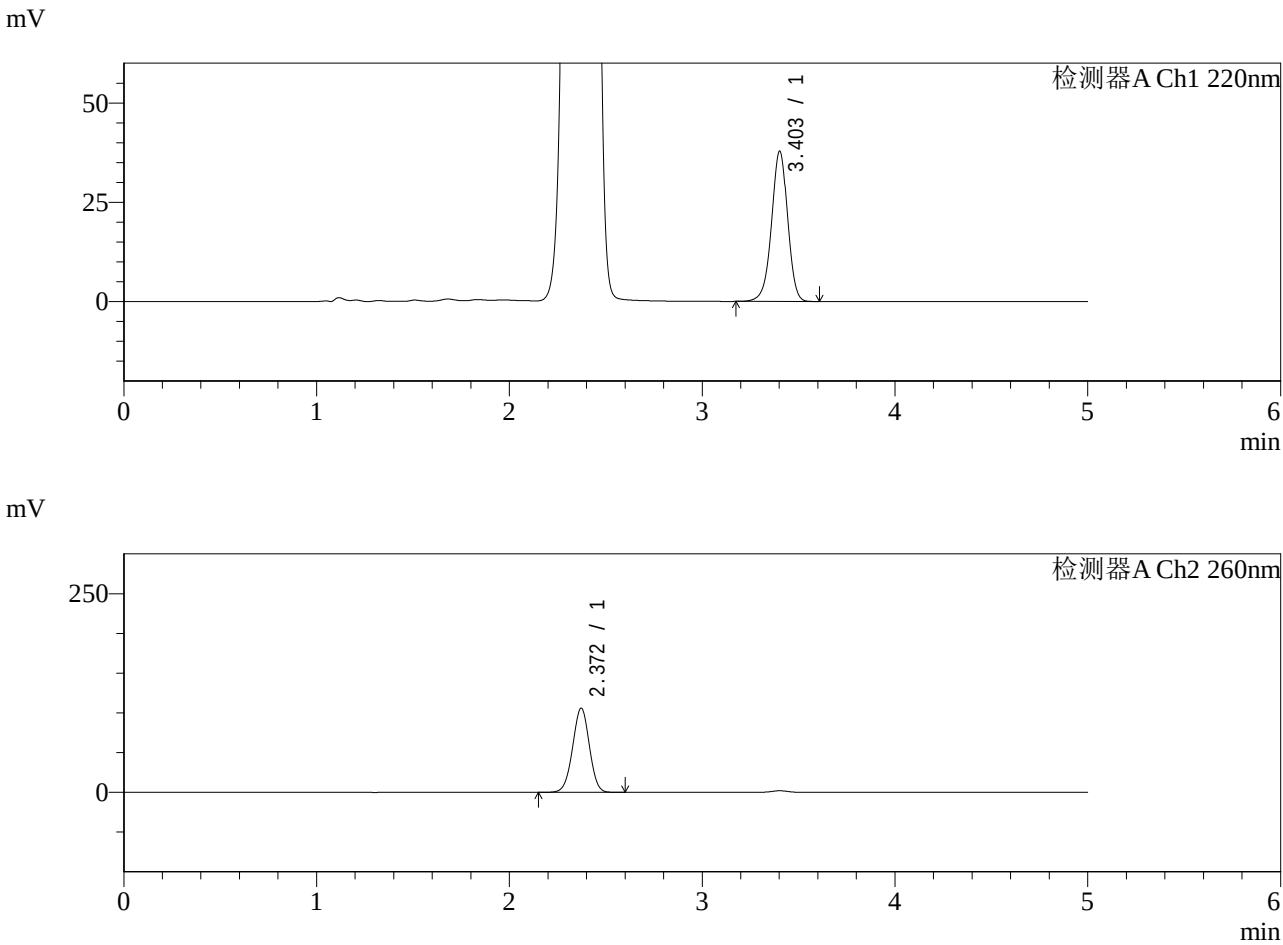

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.403	219180	100.000	37772	8168	0.961	--
总计		219180	100.000	37772			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	642312	100.000	105989	3517	0.986	--
总计		642312	100.000	105989			

图57 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-180min-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-398-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-180min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 16:42:43
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

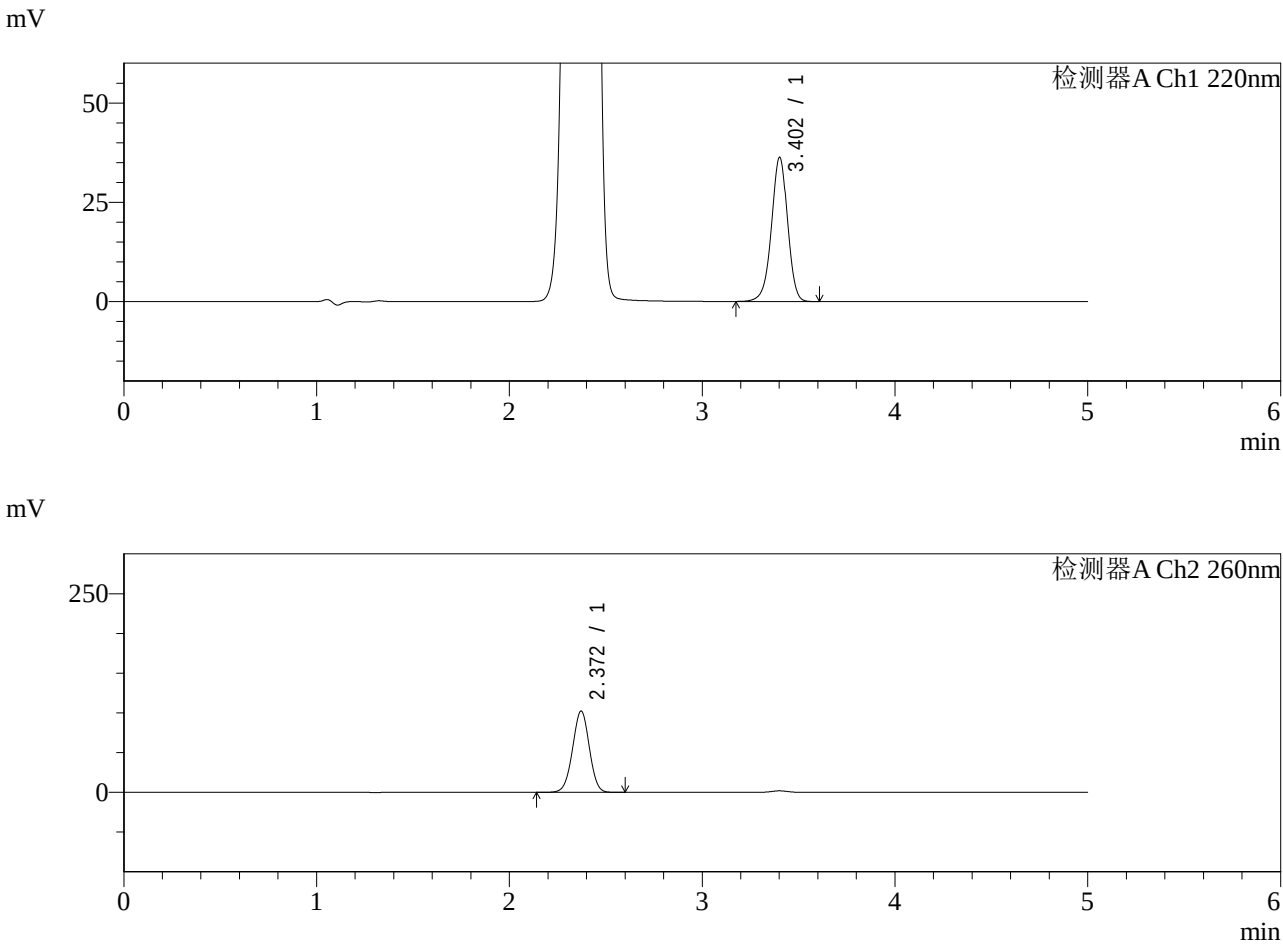

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	210231	100.000	36203	8168	0.961	--
总计		210231	100.000	36203			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	620445	100.000	102444	3521	0.987	--
总计		620445	100.000	102444			

图58 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-180min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-399-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-180min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 16:48:06
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

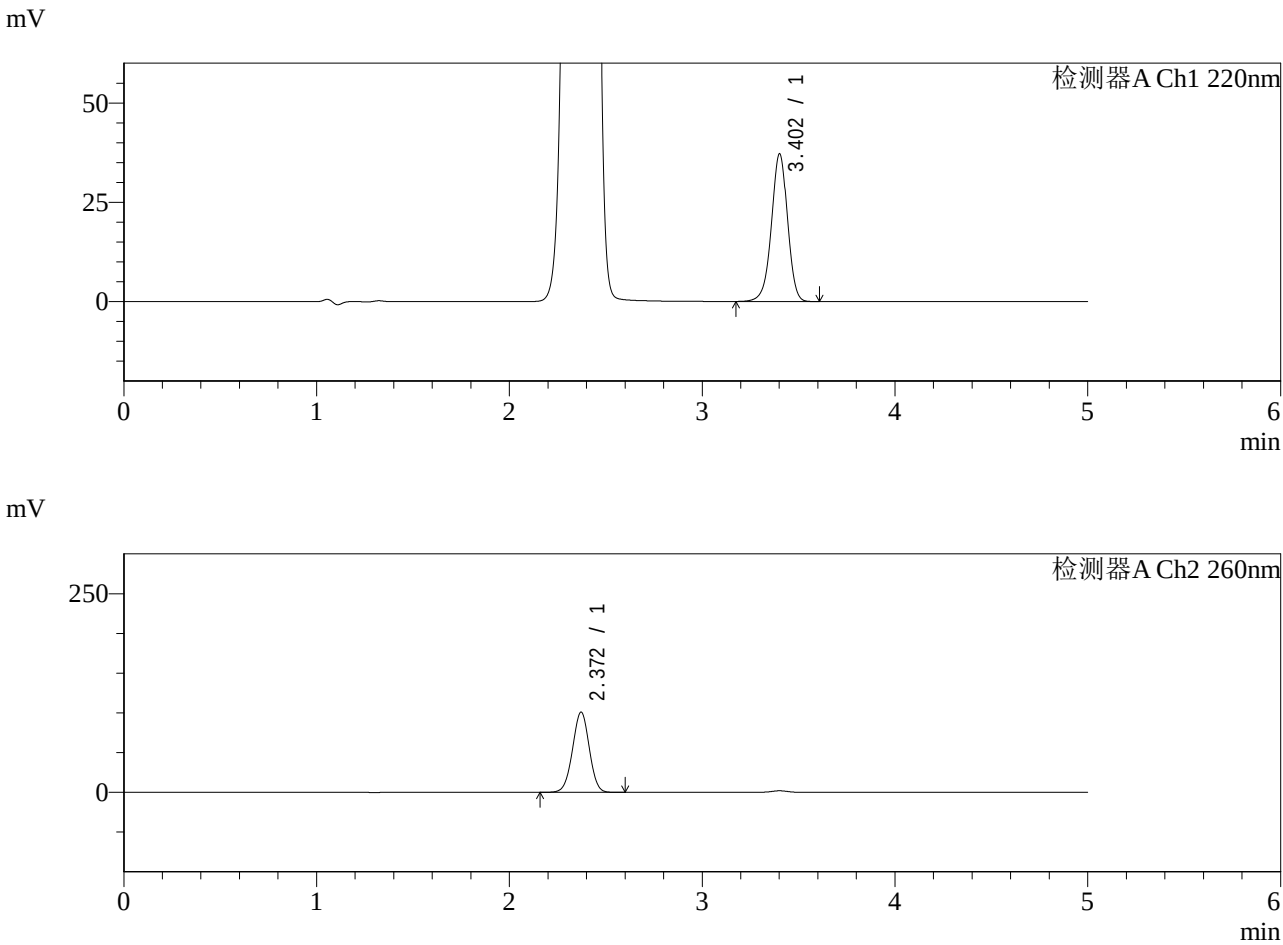

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	215382	100.000	37083	8156	0.961	--
总计		215382	100.000	37083			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	611842	100.000	101067	3522	0.988	--
总计		611842	100.000	101067			

图59 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-180min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-400-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-180min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 16:53:29
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

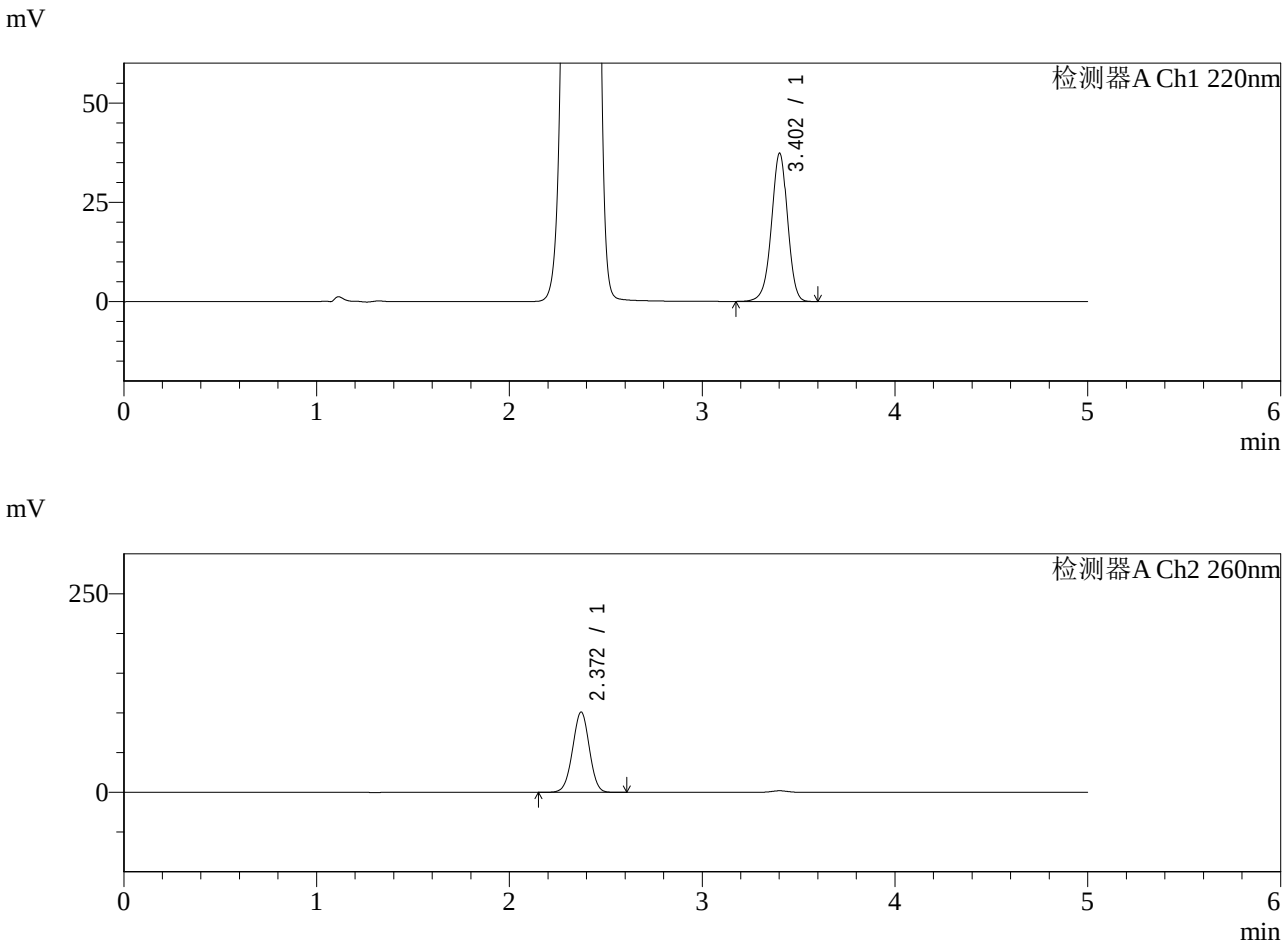

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	216324	100.000	37245	8150	0.962	--
总计		216324	100.000	37245			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	612807	100.000	101181	3522	0.988	--
总计		612807	100.000	101181			

图60 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-180min-片6
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-401-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-240min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 16:58:54
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

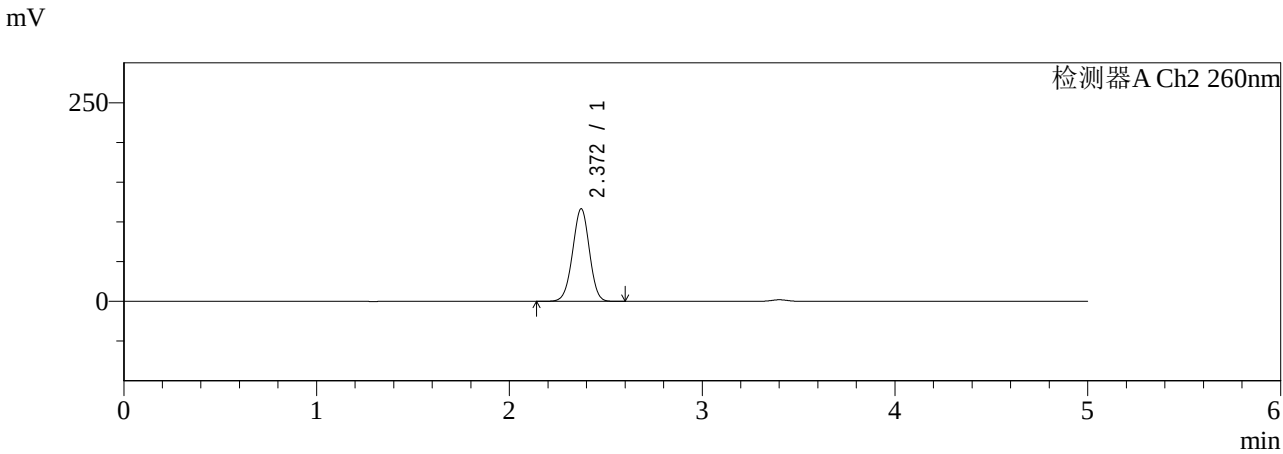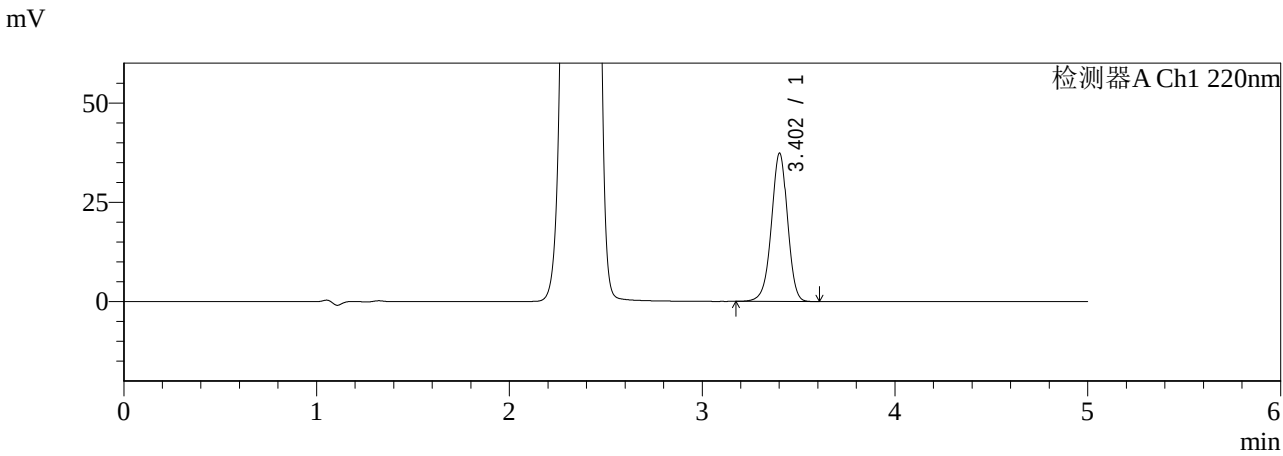

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	216341	100.000	37235	8153	0.962	--
总计		216341	100.000	37235			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	706909	100.000	116498	3510	0.983	--
总计		706909	100.000	116498			

图61 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-402-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-240min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 17:04:18
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

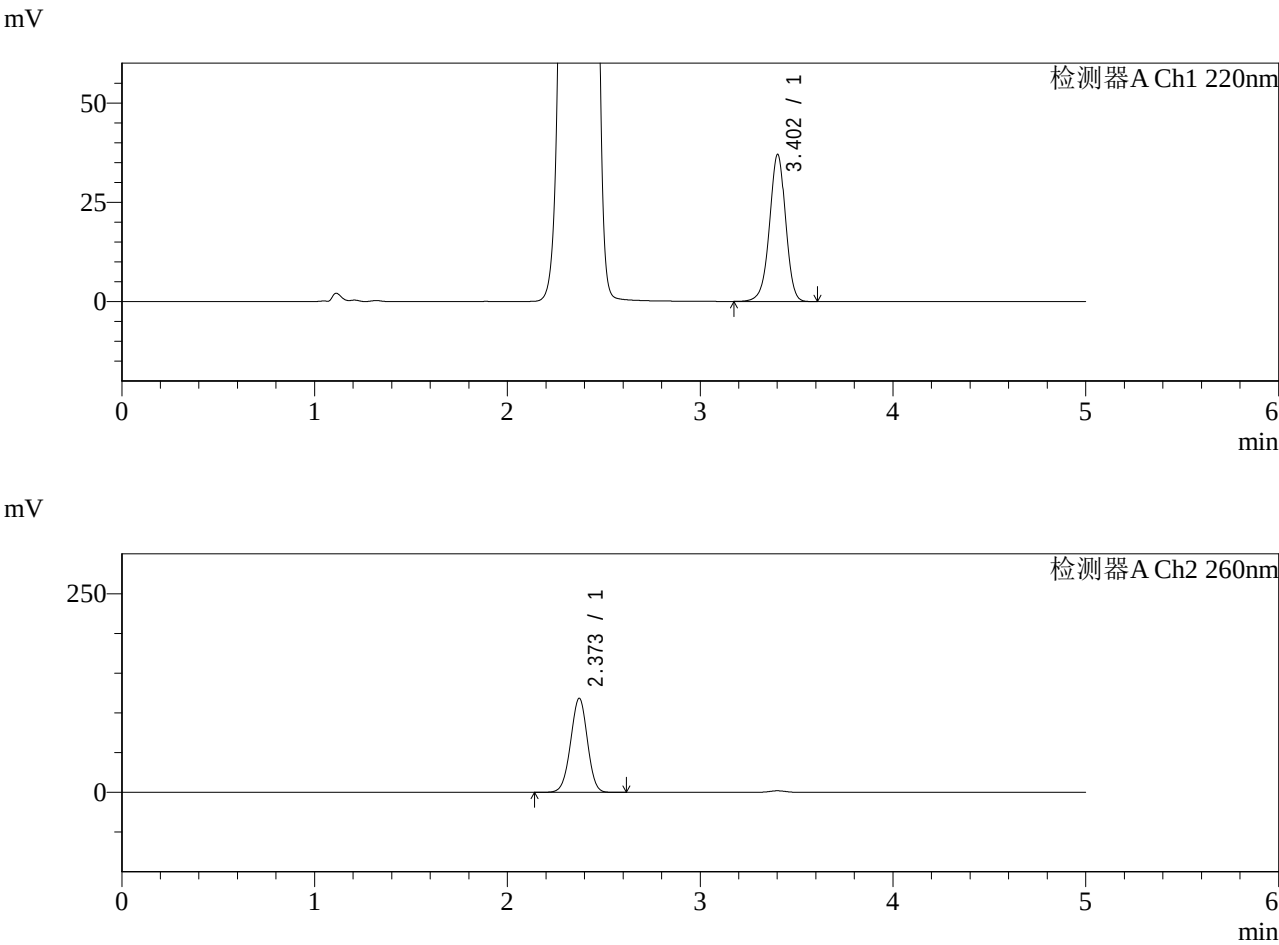

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.402	214339	100.000	36928	8165	0.962	--
总计		214339	100.000	36928			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	718307	100.000	118368	3511	0.983	--
总计		718307	100.000	118368			

图62 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-403-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-240min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 17:09:40
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

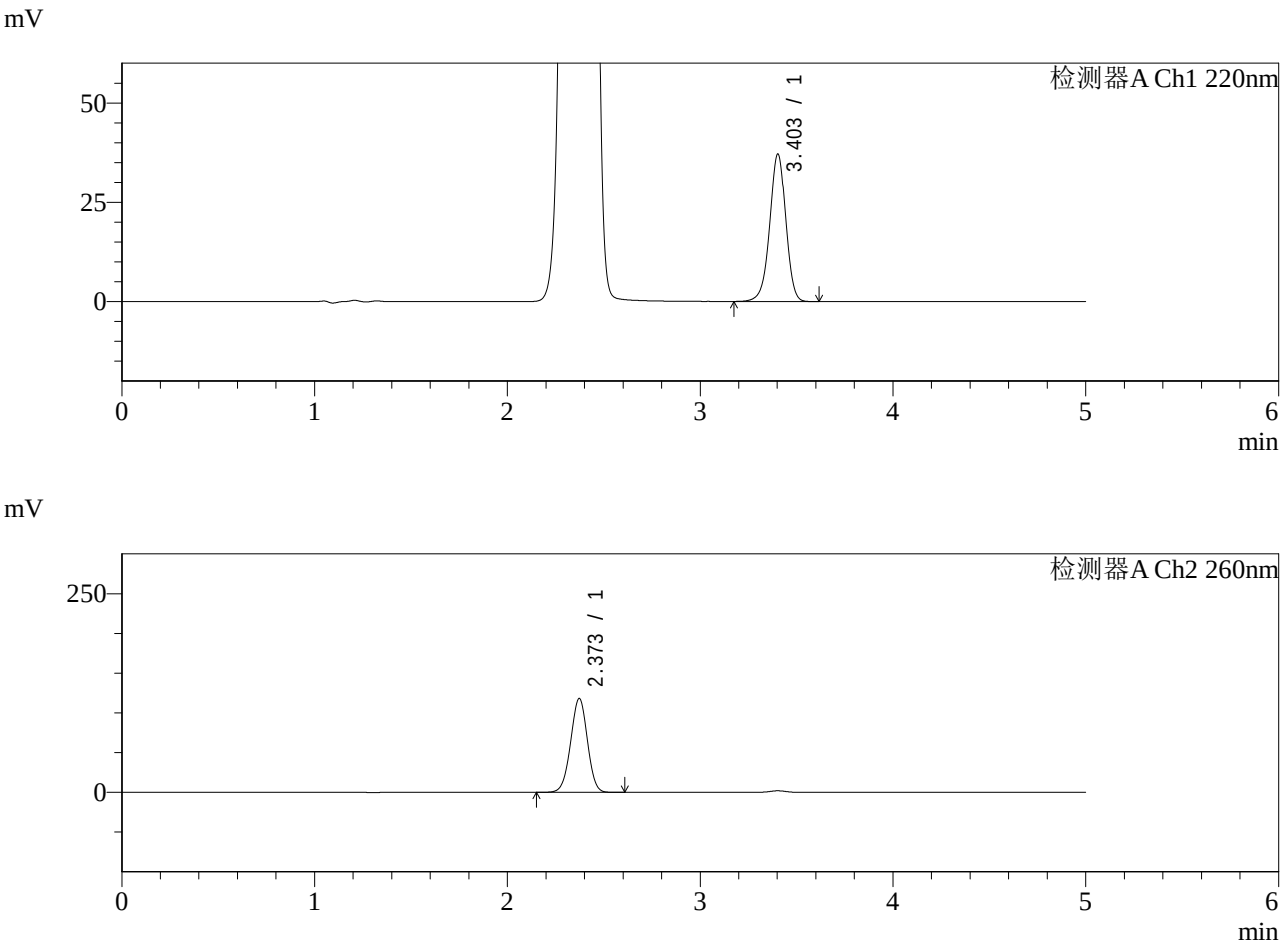

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.403	215007	100.000	37104	8181	0.961	--
总计		215007	100.000	37104			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	716448	100.000	118141	3516	0.983	--
总计		716448	100.000	118141			

图63 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片3
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-404-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-240min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 17:15:04
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

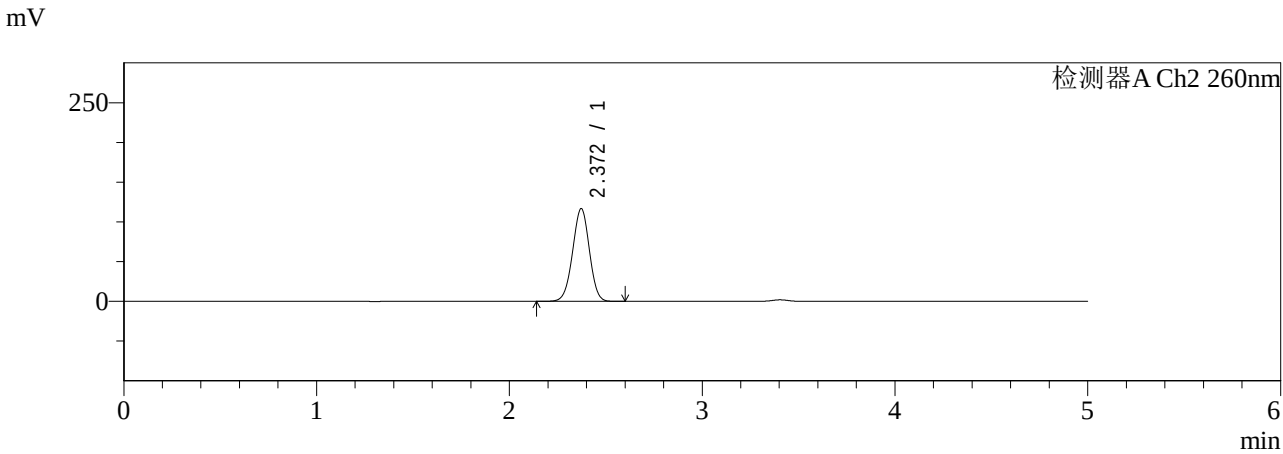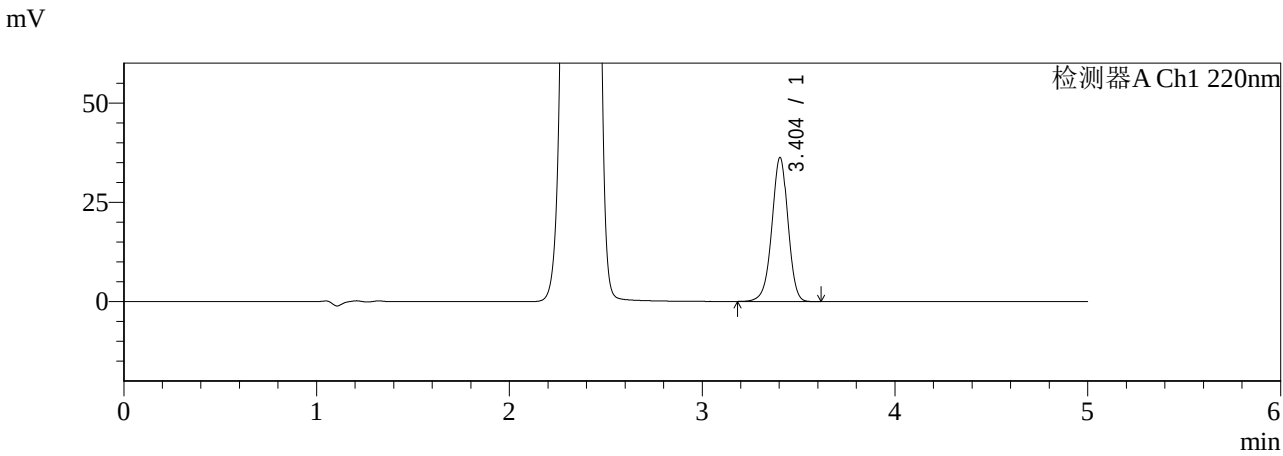

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.404	209824	100.000	36268	8179	0.963	--
总计		209824	100.000	36268			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	707880	100.000	116755	3516	0.983	--
总计		707880	100.000	116755			

图64 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-405-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-240min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 17:20:27
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

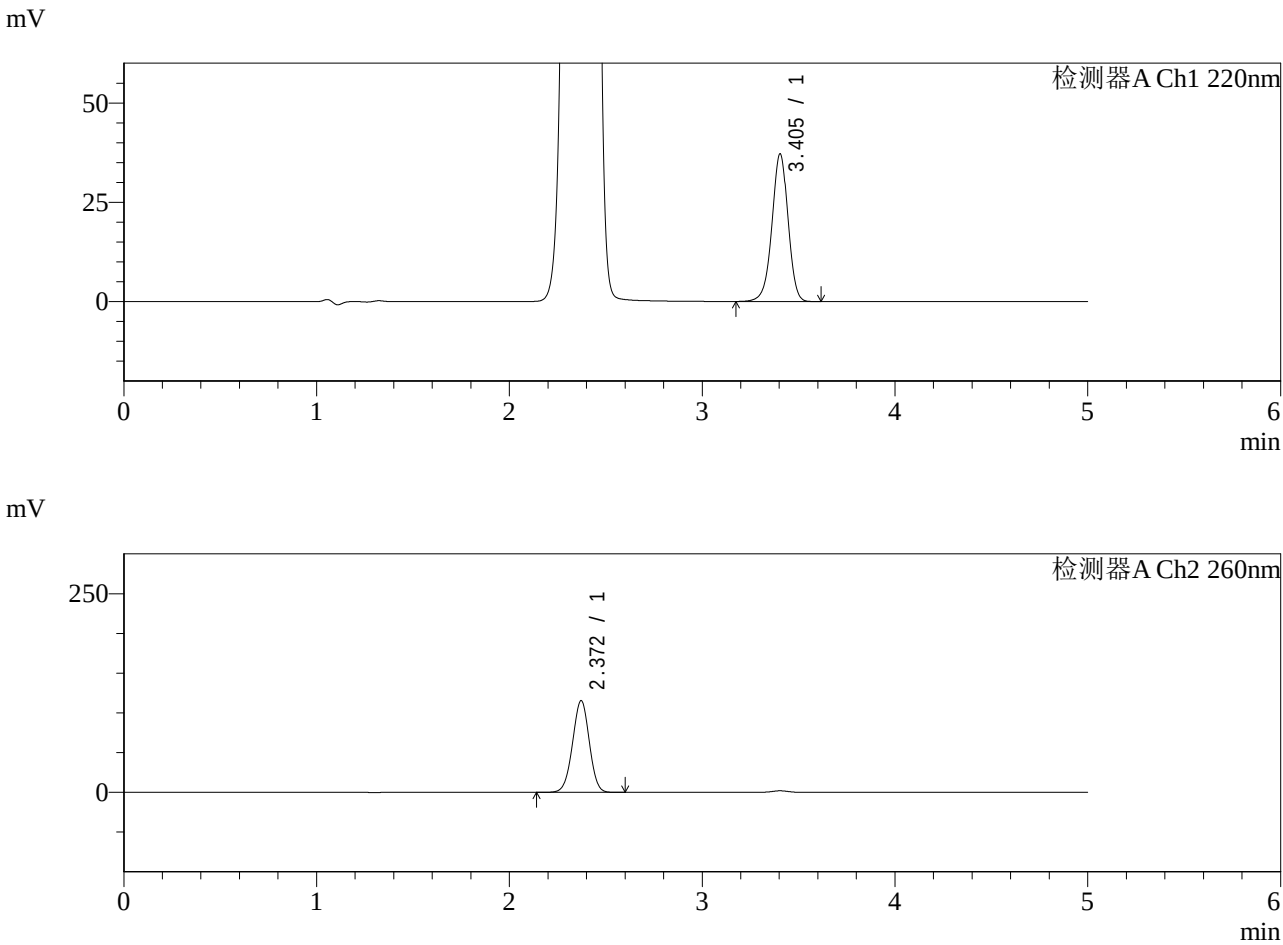

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.405	215132	100.000	37182	8181	0.962	--
总计		215132	100.000	37182			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	699320	100.000	115506	3523	0.984	--
总计		699320	100.000	115506			

图65 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-406-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-240min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 17:25:49
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

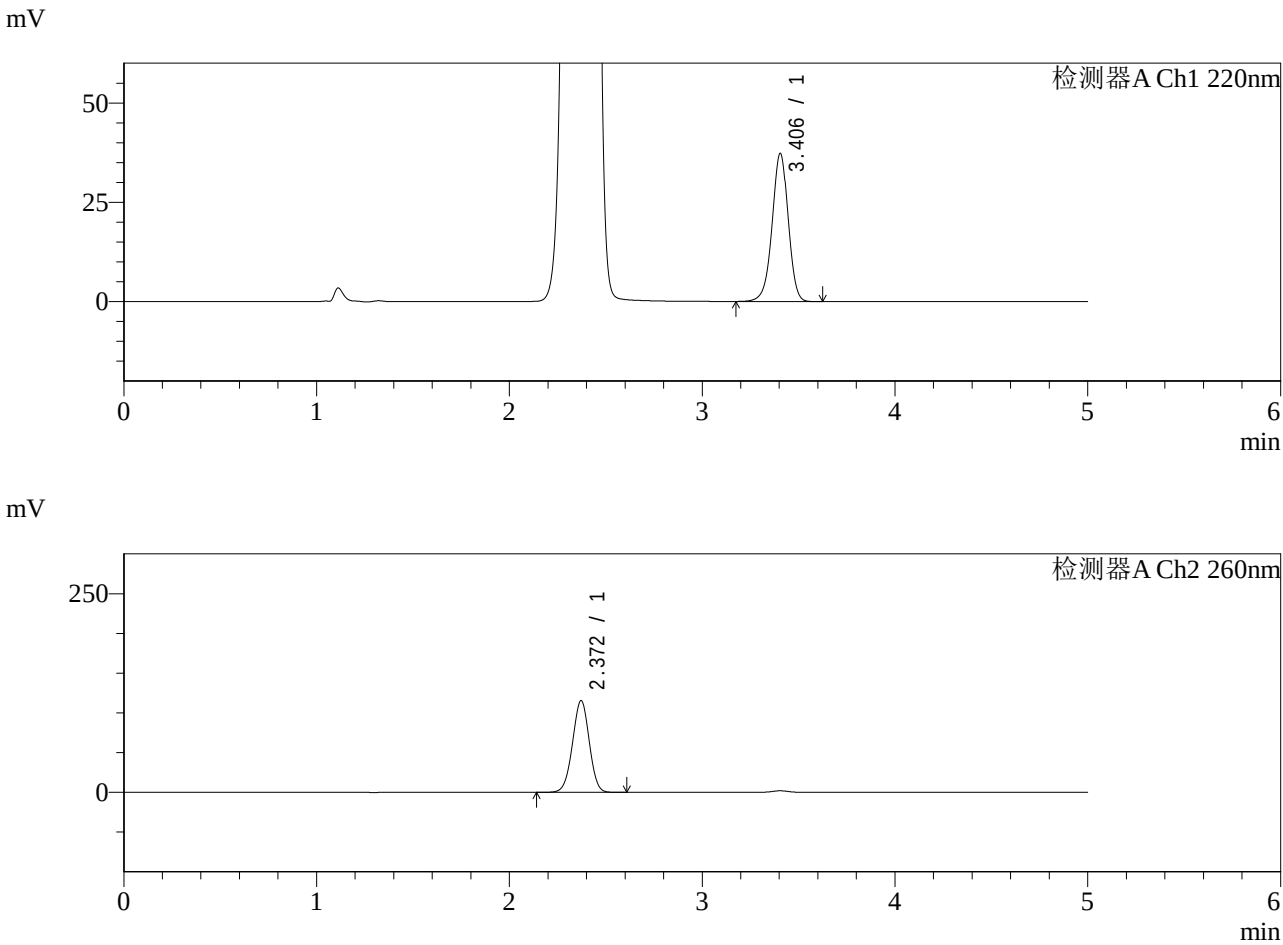

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.406	215888	100.000	37313	8180	0.965	--
总计		215888	100.000	37313			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	699206	100.000	115531	3526	0.984	--
总计		699206	100.000	115531			

图66 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-407-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-360min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 17:31:16
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

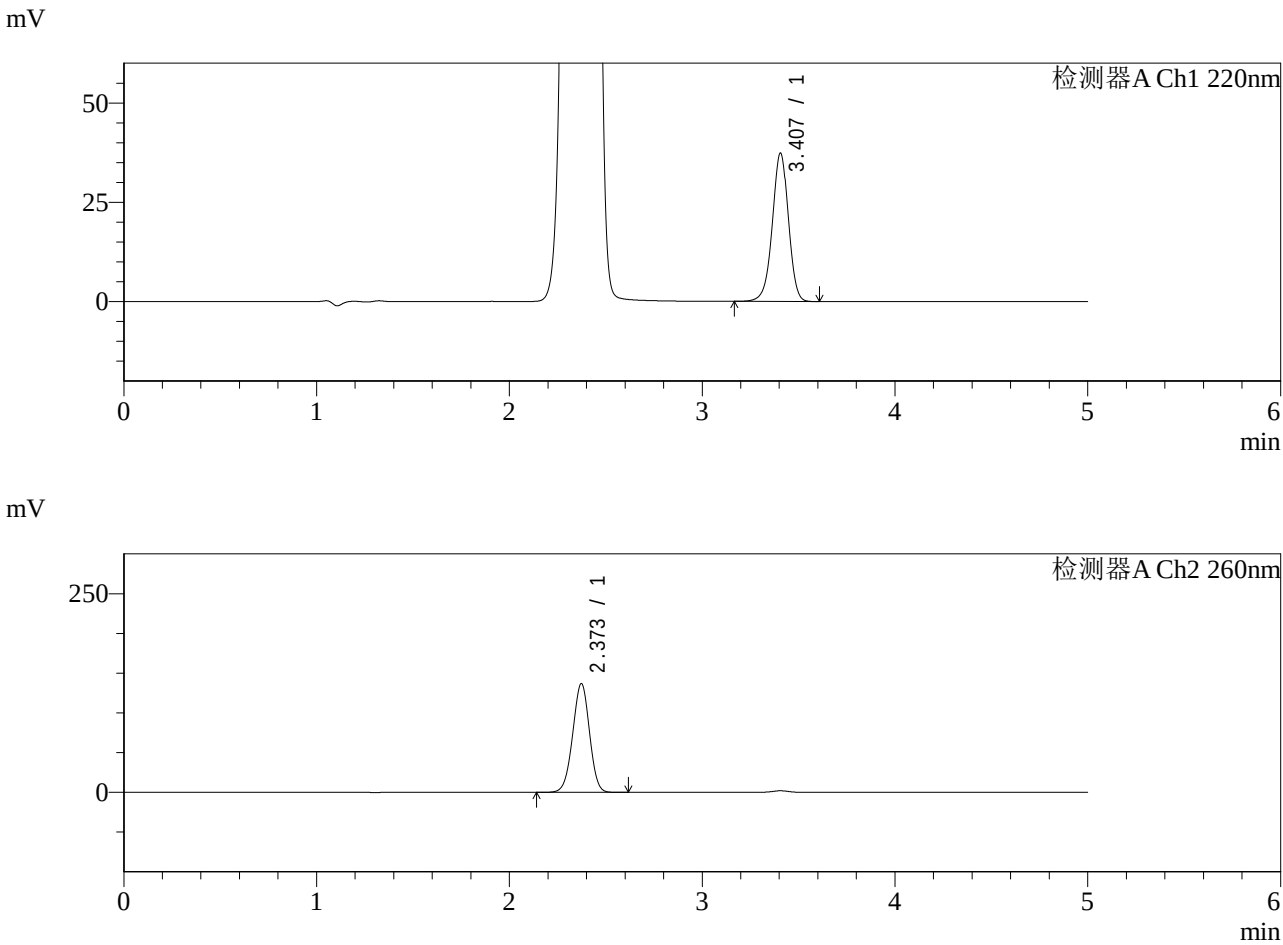

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.407	216253	100.000	37342	8197	0.964	--
总计		216253	100.000	37342			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	831027	100.000	136804	3510	0.977	--
总计		831027	100.000	136804			

图67 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-408-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-360min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 17:36:40
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

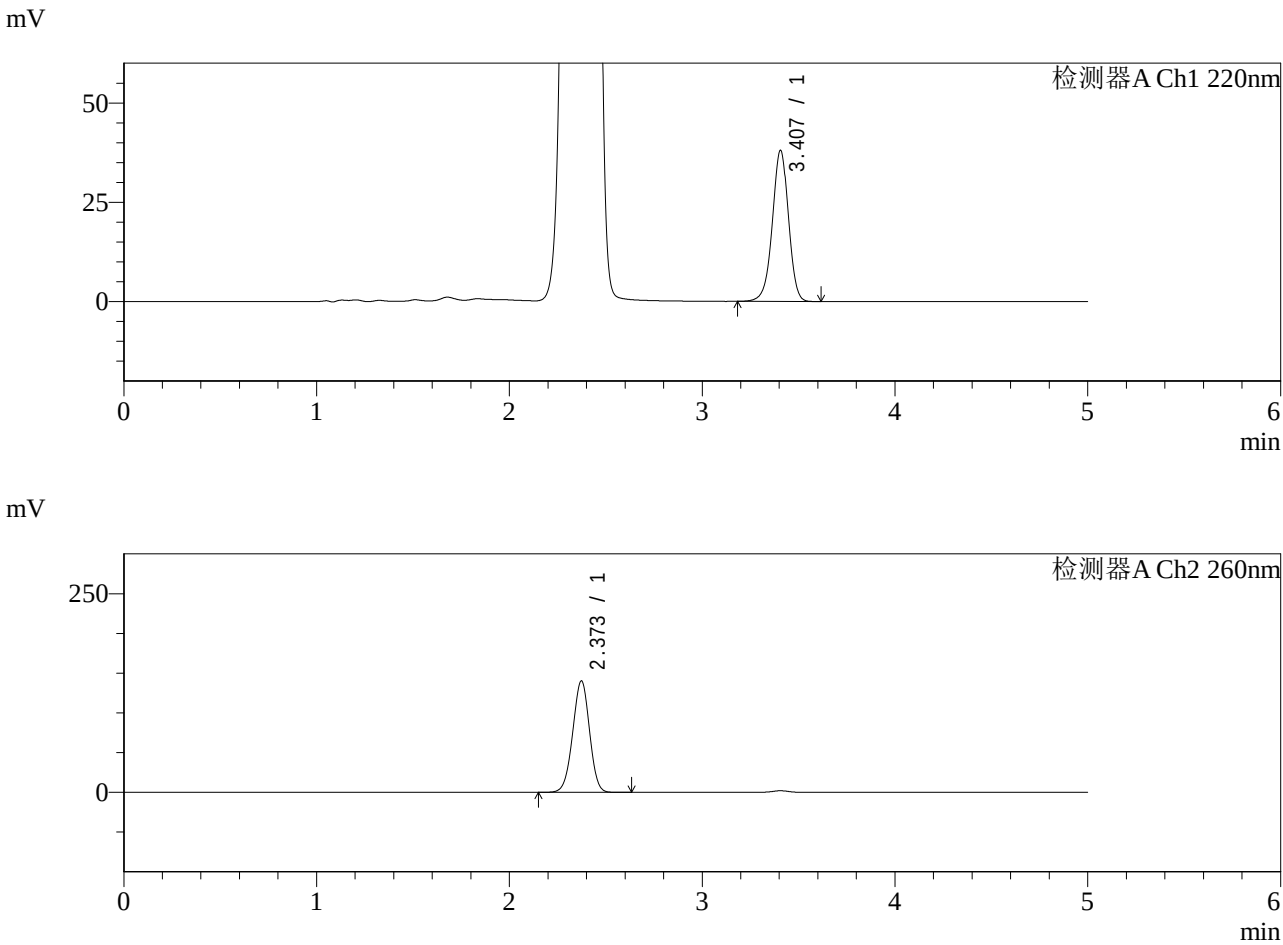

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.407	220130	100.000	38025	8200	0.965	--
总计		220130	100.000	38025			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	852534	100.000	140192	3503	0.977	--
总计		852534	100.000	140192			

图68 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-409-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-360min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 17:42:05
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

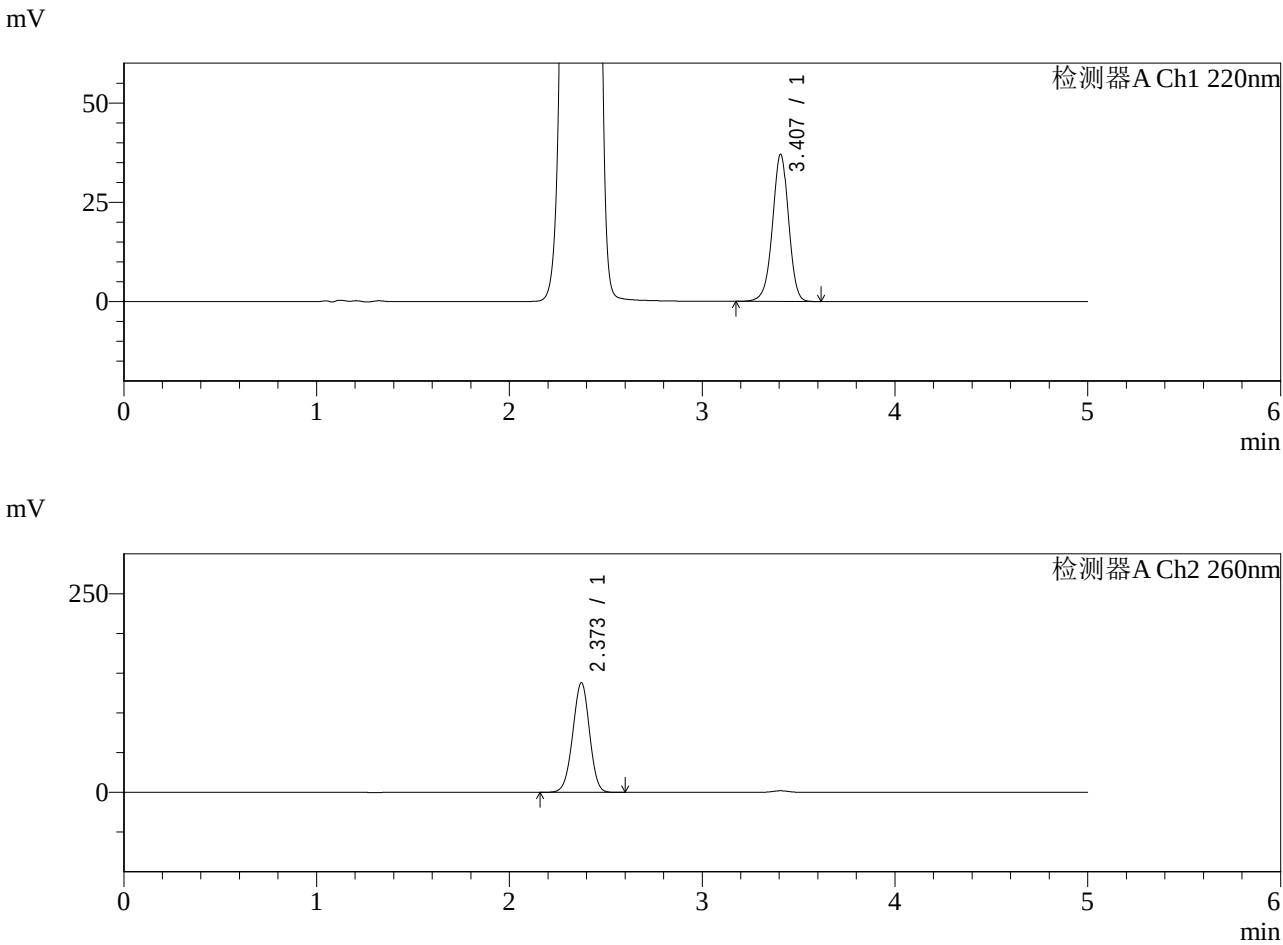

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.407	214228	100.000	36983	8210	0.964	--
总计		214228	100.000	36983			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	837314	100.000	137954	3514	0.977	--
总计		837314	100.000	137954			

图69 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-410-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-360min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 17:47:28
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

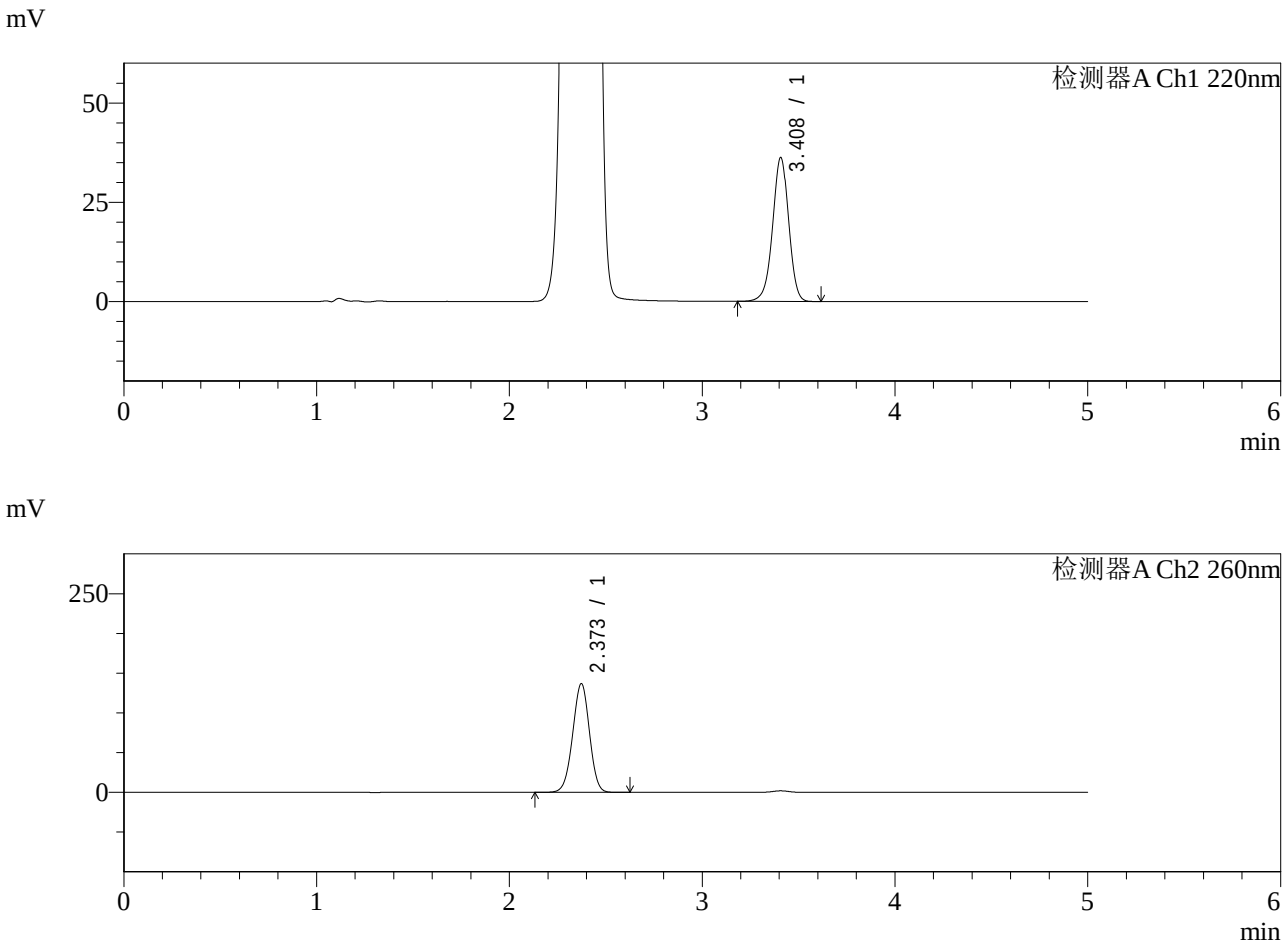

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.408	209388	100.000	36129	8215	0.965	--
总计		209388	100.000	36129			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	830369	100.000	136855	3515	0.978	--
总计		830369	100.000	136855			

图70 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-411-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-360min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 17:52:52
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

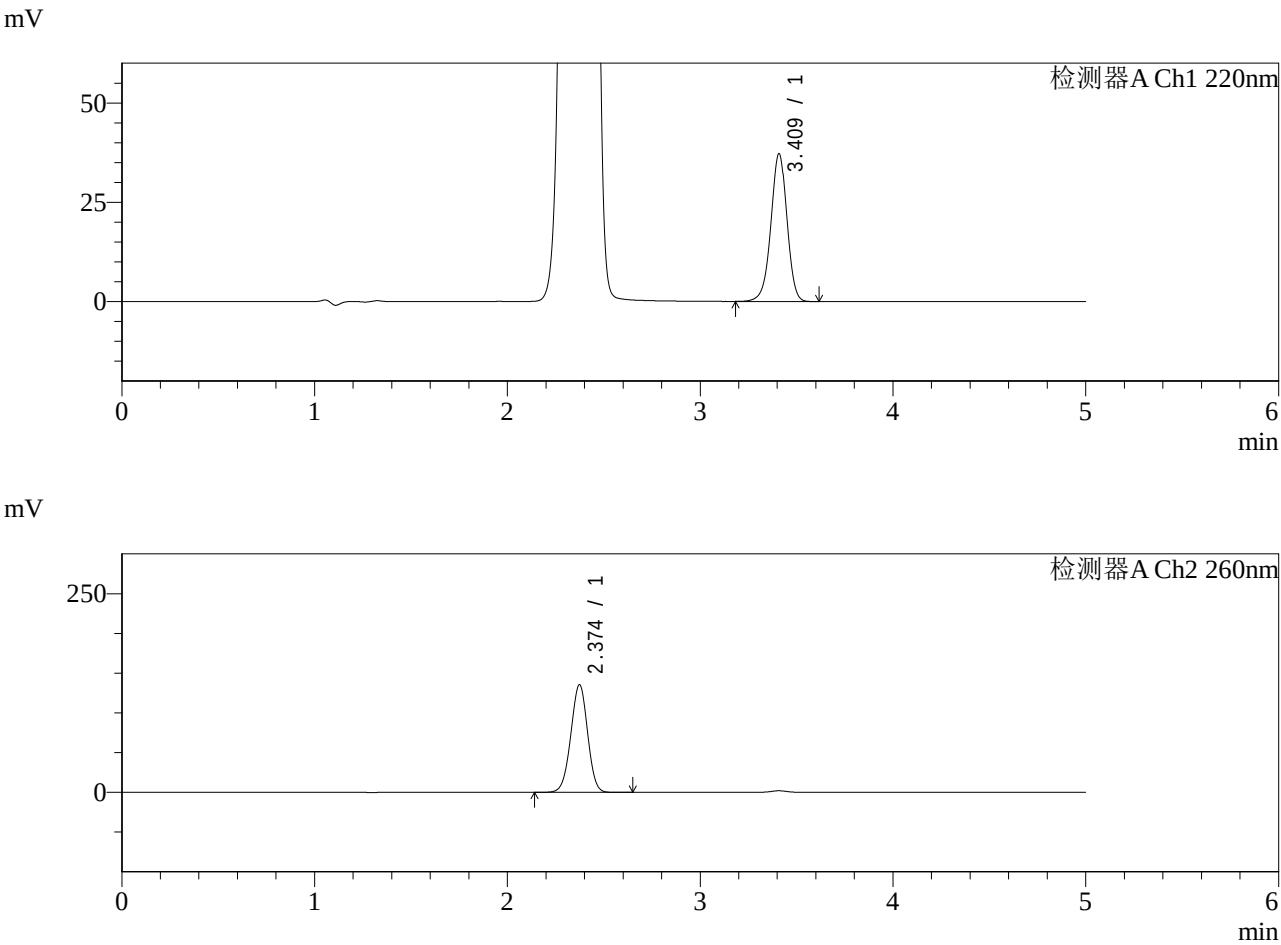

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.409	215228	100.000	37022	8217	0.964	--
总计		215228	100.000	37022			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	821930	100.000	135372	3519	0.979	--
总计		821930	100.000	135372			

图71 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-412-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-360min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 17:58:15
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

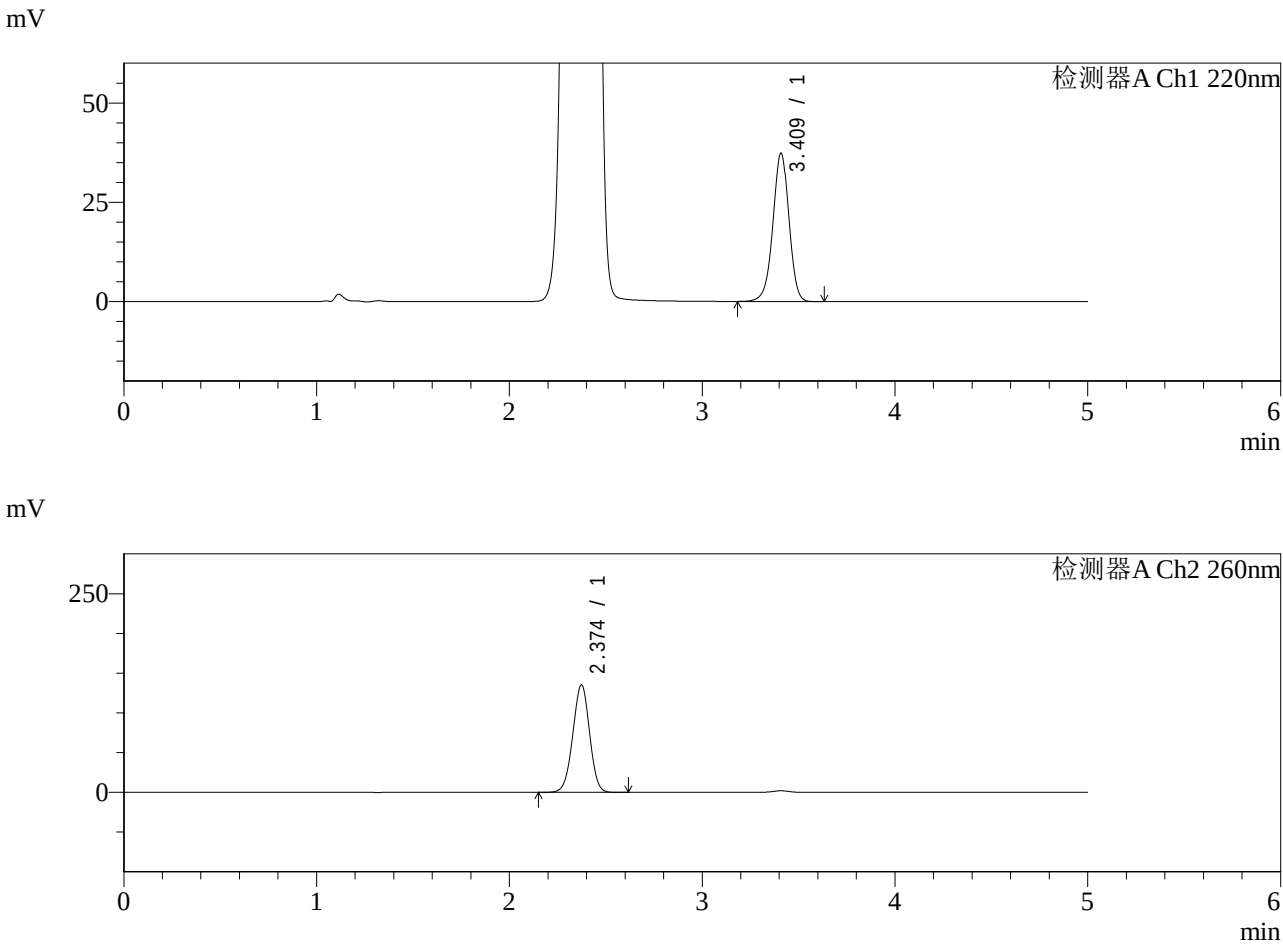

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.409	215796	100.000	37142	8224	0.965	--
总计		215796	100.000	37142			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	820735	100.000	135279	3521	0.979	--
总计		820735	100.000	135279			

图72 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-413-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-480min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 18:03:39
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

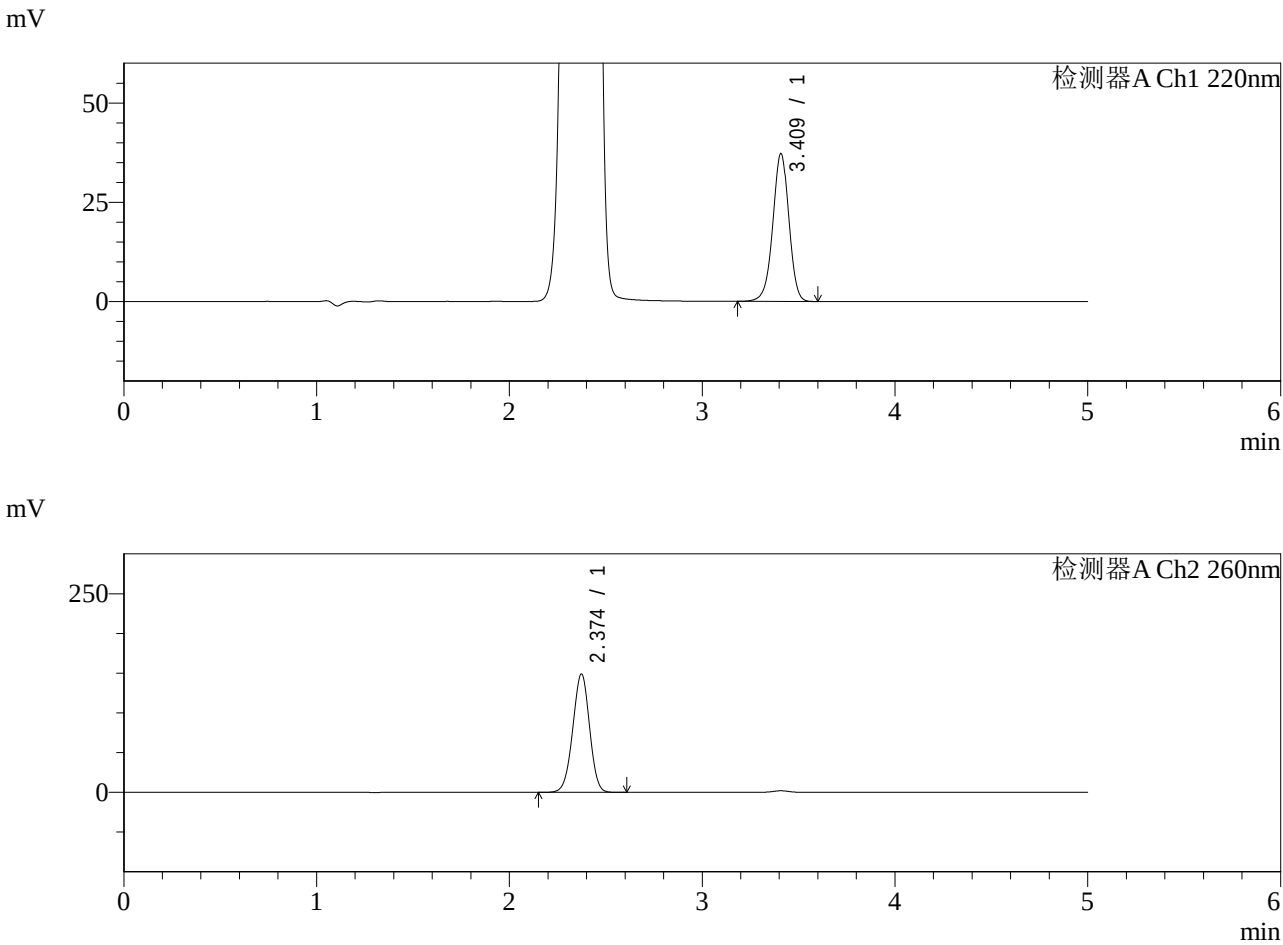

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.409	215115	100.000	37028	8224	0.967	--
总计		215115	100.000	37028			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	904479	100.000	148851	3510	0.974	--
总计		904479	100.000	148851			

图73 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-414-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-480min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 18:09:03
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:17:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

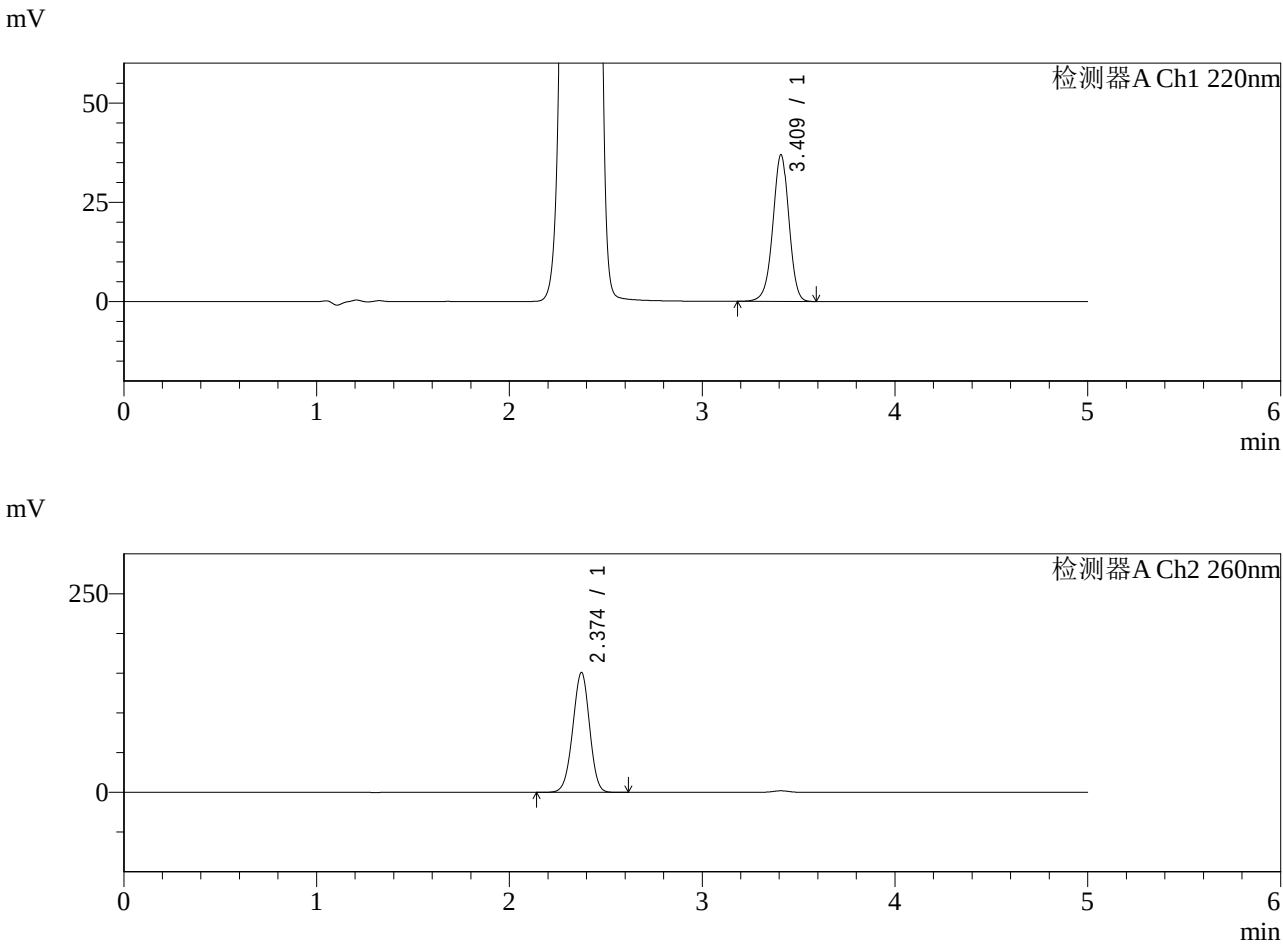

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.409	213250	100.000	36709	8223	0.966	--
总计		213250	100.000	36709			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	915802	100.000	150717	3511	0.974	--
总计		915802	100.000	150717			

图74 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-415-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-480min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 18:14:27
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

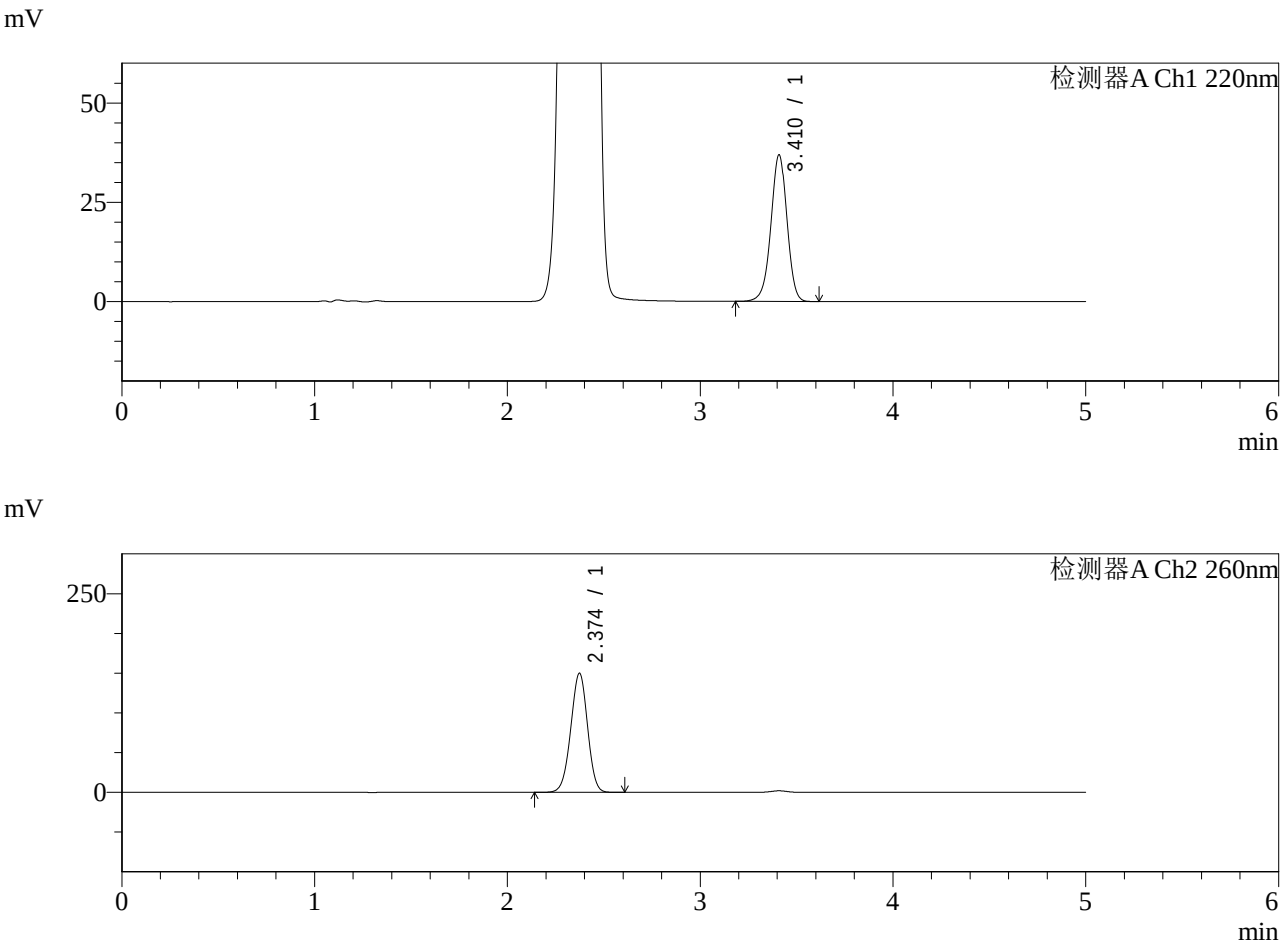

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.410	213234	100.000	36738	8223	0.967	--
总计		213234	100.000	36738			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	909783	100.000	149772	3514	0.975	--
总计		909783	100.000	149772			

图75 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-416-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-480min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 18:19:51
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

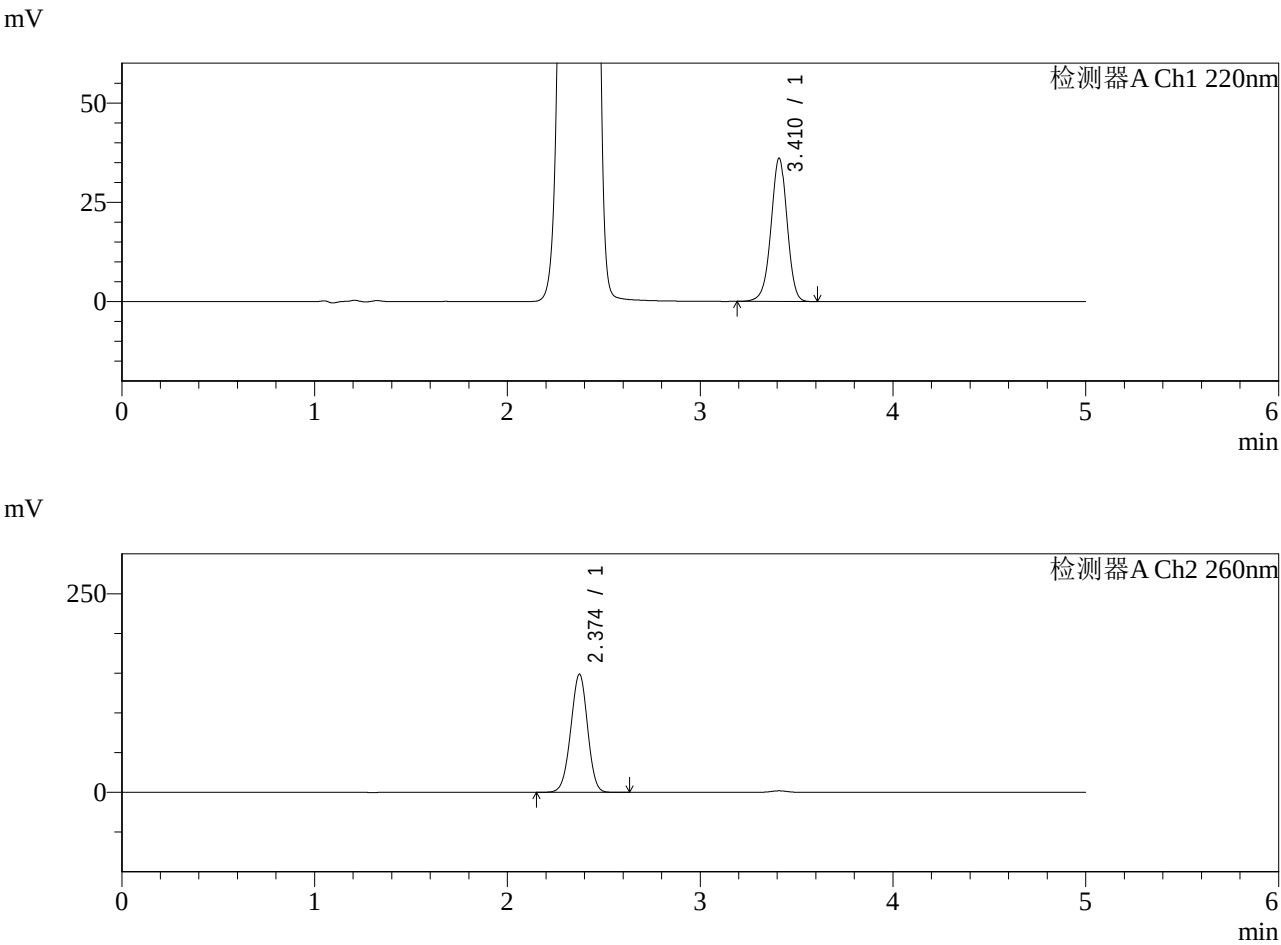

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.410	208158	100.000	35929	8229	0.966	--
总计		208158	100.000	35929			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	903290	100.000	148630	3511	0.975	--
总计		903290	100.000	148630			

图76 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-417-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-480min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 18:25:14
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

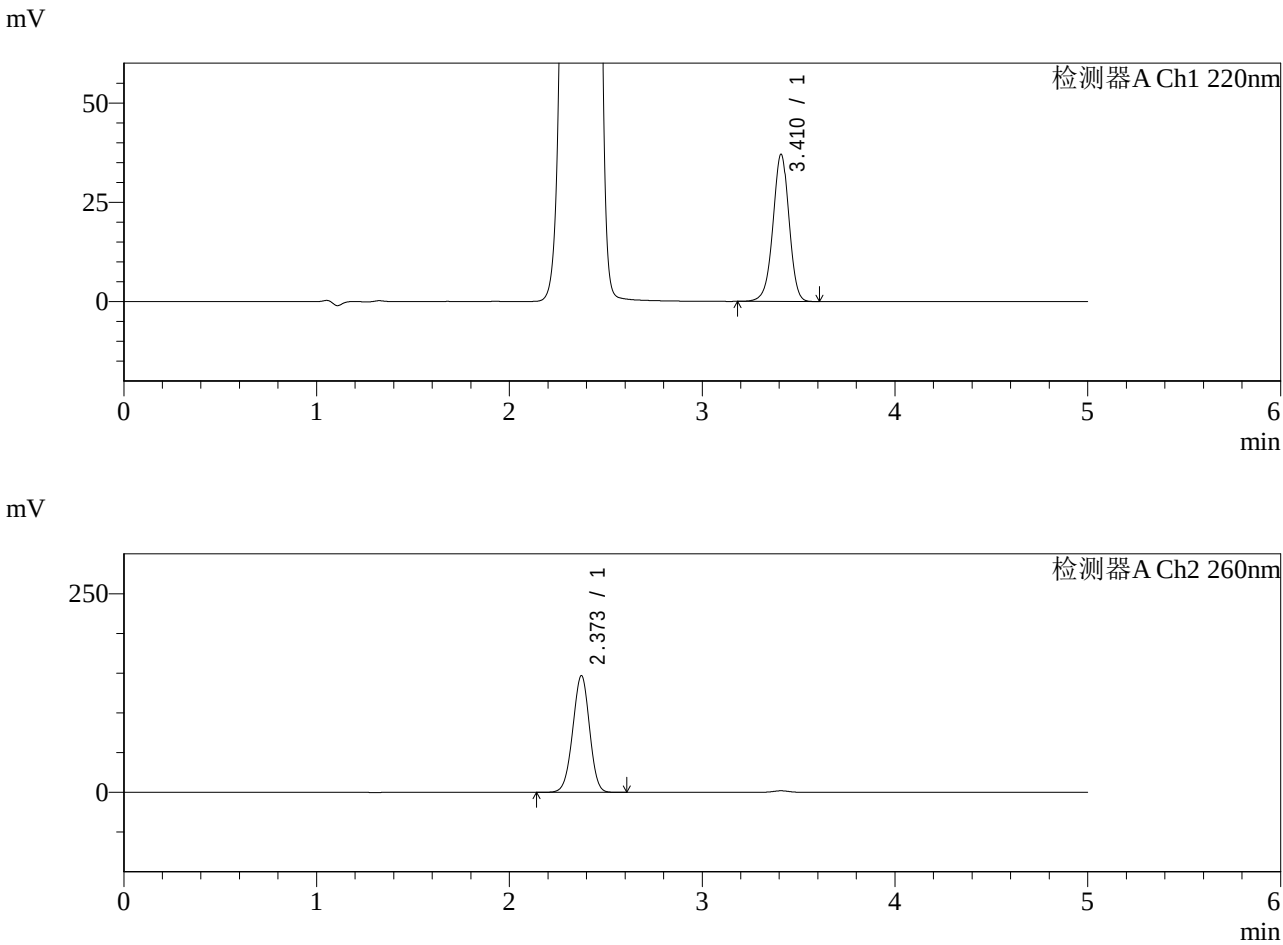

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.410	213912	100.000	36887	8233	0.967	--
总计		213912	100.000	36887			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	891139	100.000	146796	3515	0.976	--
总计		891139	100.000	146796			

图77 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-418-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-480min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 18:30:39
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

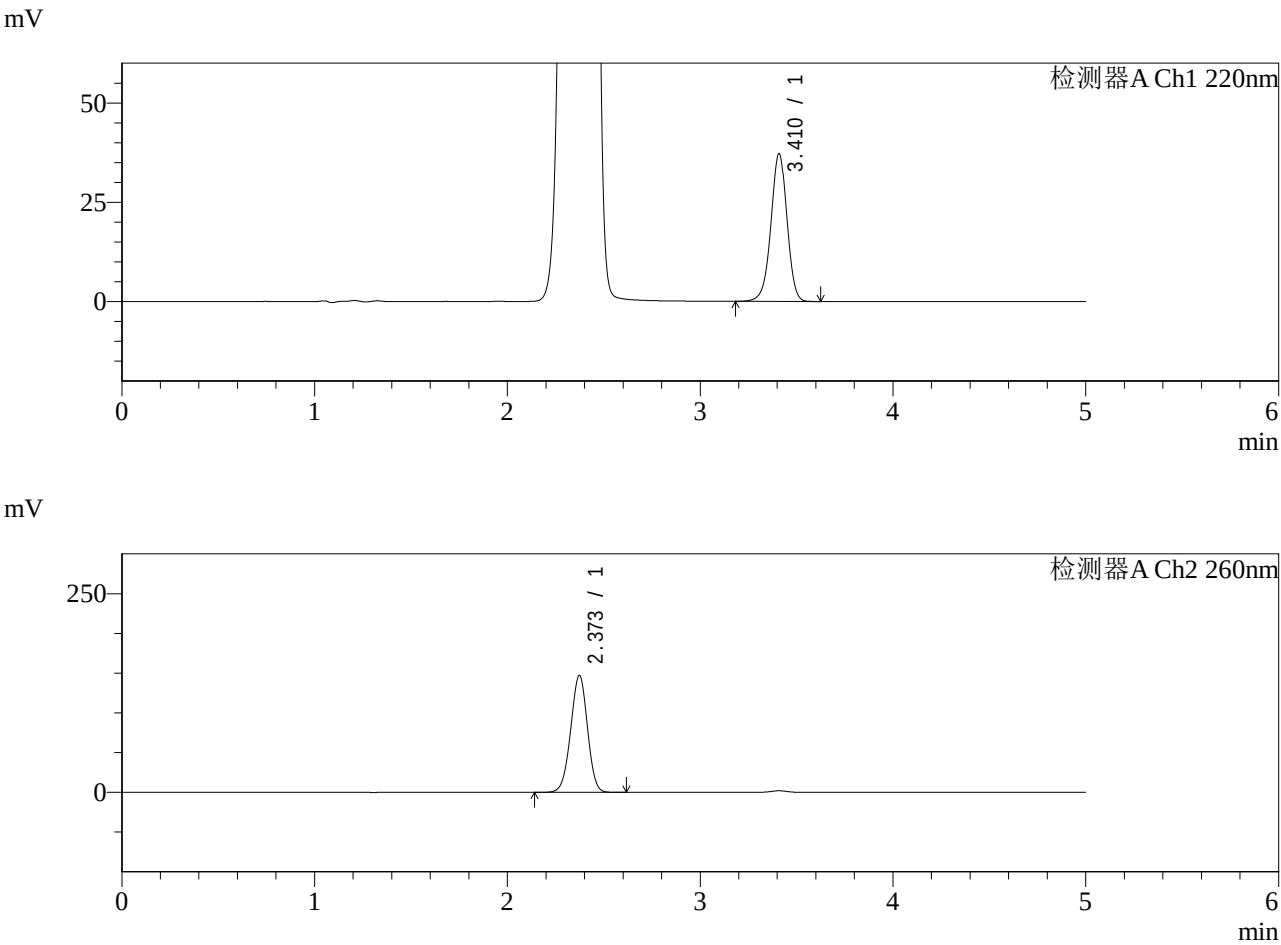

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.410	214767	100.000	37020	8236	0.967	--
总计		214767	100.000	37020			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	892267	100.000	147072	3514	0.976	--
总计		892267	100.000	147072			

图78 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-419-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-600min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 18:36:04
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

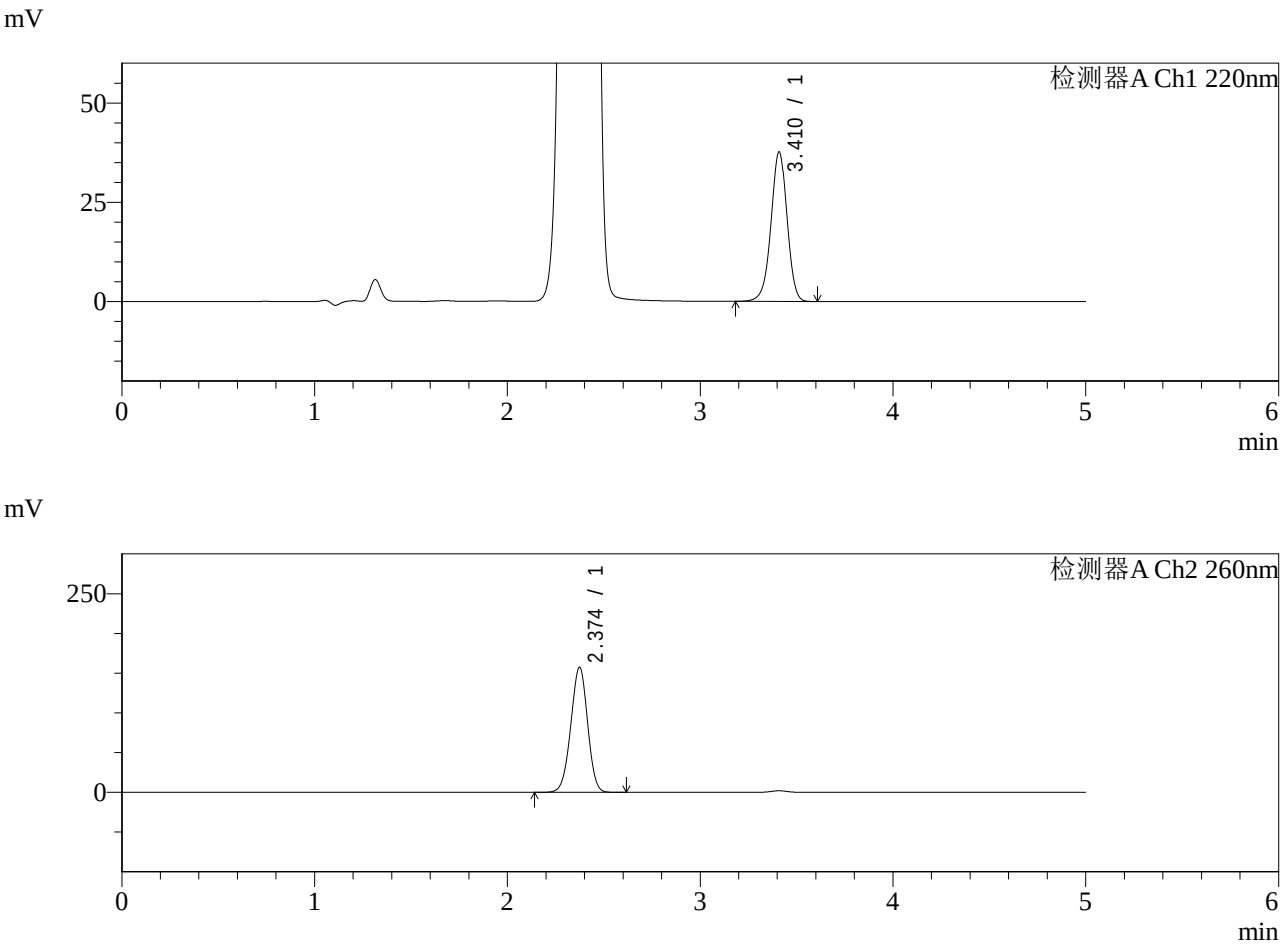

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.410	217352	100.000	37495	8225	0.967	--
总计		217352	100.000	37495			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	956906	100.000	157208	3501	0.973	--
总计		956906	100.000	157208			

图79 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-420-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-600min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 18:41:30
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

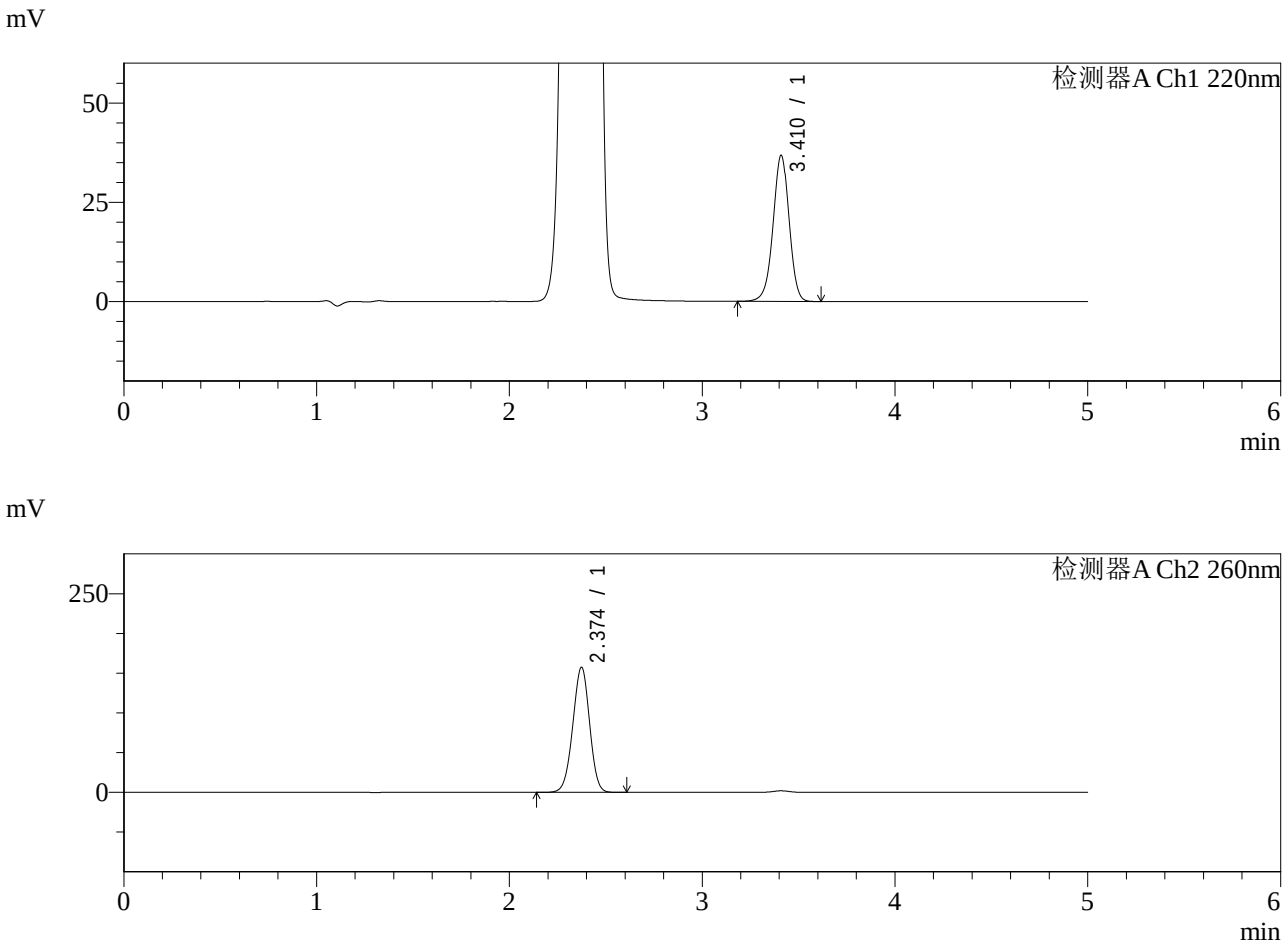

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.410	212538	100.000	36668	8231	0.968	--
总计		212538	100.000	36668			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	955663	100.000	157218	3510	0.973	--
总计		955663	100.000	157218			

图80 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-421-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-600min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 18:46:54
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

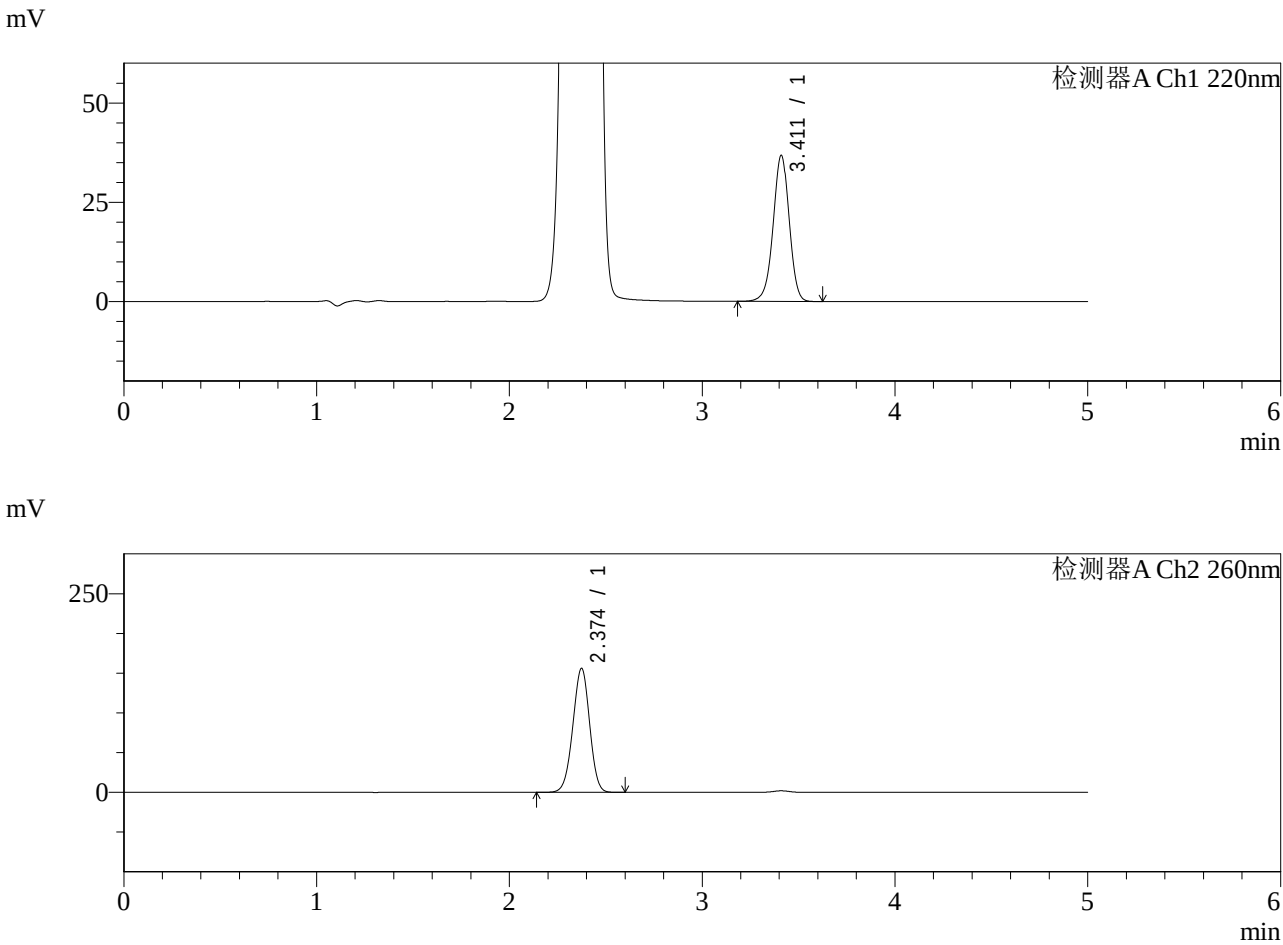

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	212408	100.000	36705	8234	0.969	--
总计		212408	100.000	36705			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	947144	100.000	155843	3515	0.973	--
总计		947144	100.000	155843			

图81 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片3
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-422-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-600min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 18:52:17
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

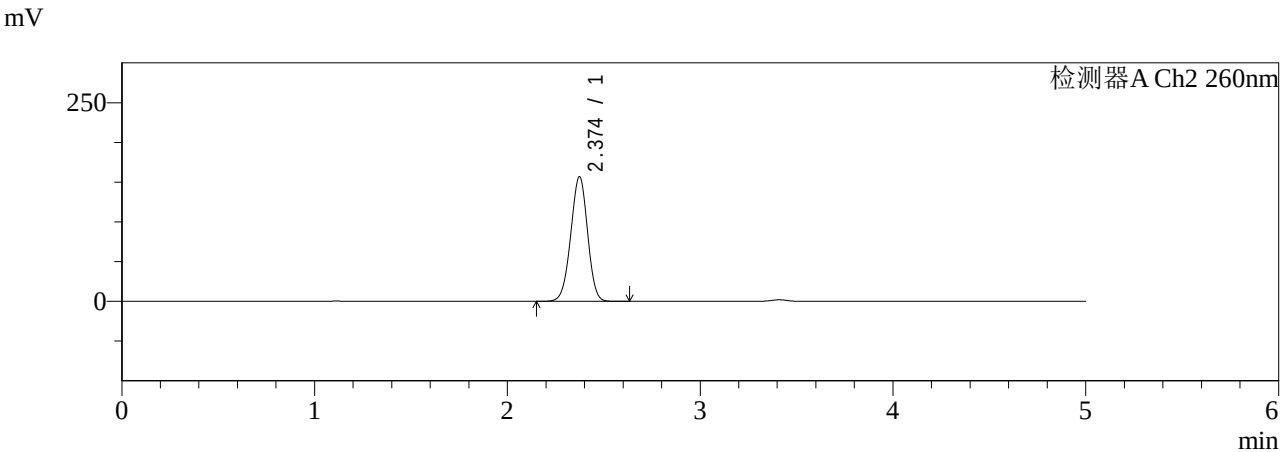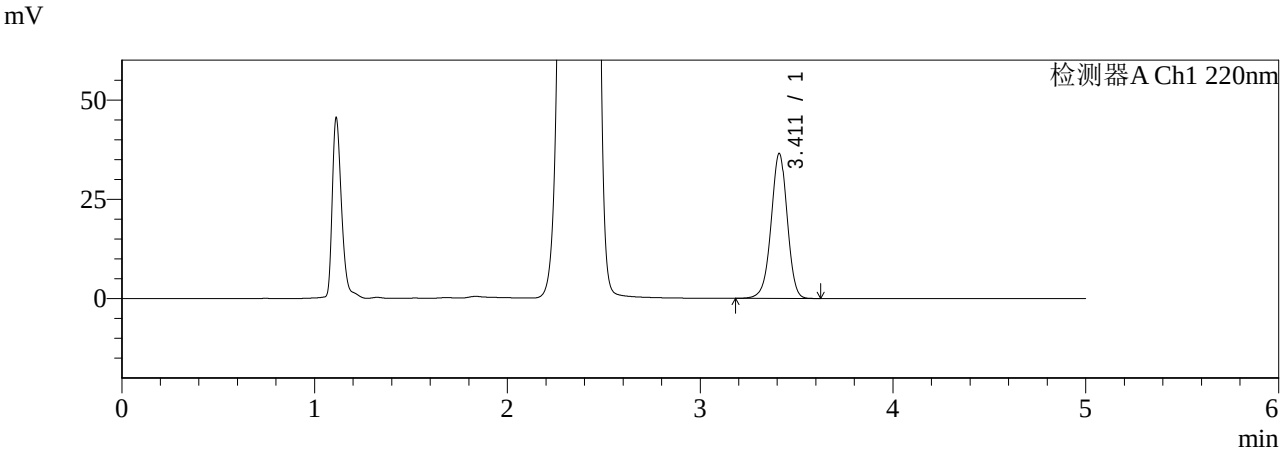

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	210640	100.000	36407	8226	0.969	--
总计		210640	100.000	36407			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	953717	100.000	156803	3505	0.973	--
总计		953717	100.000	156803			

图82 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-423-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-600min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 18:57:41
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

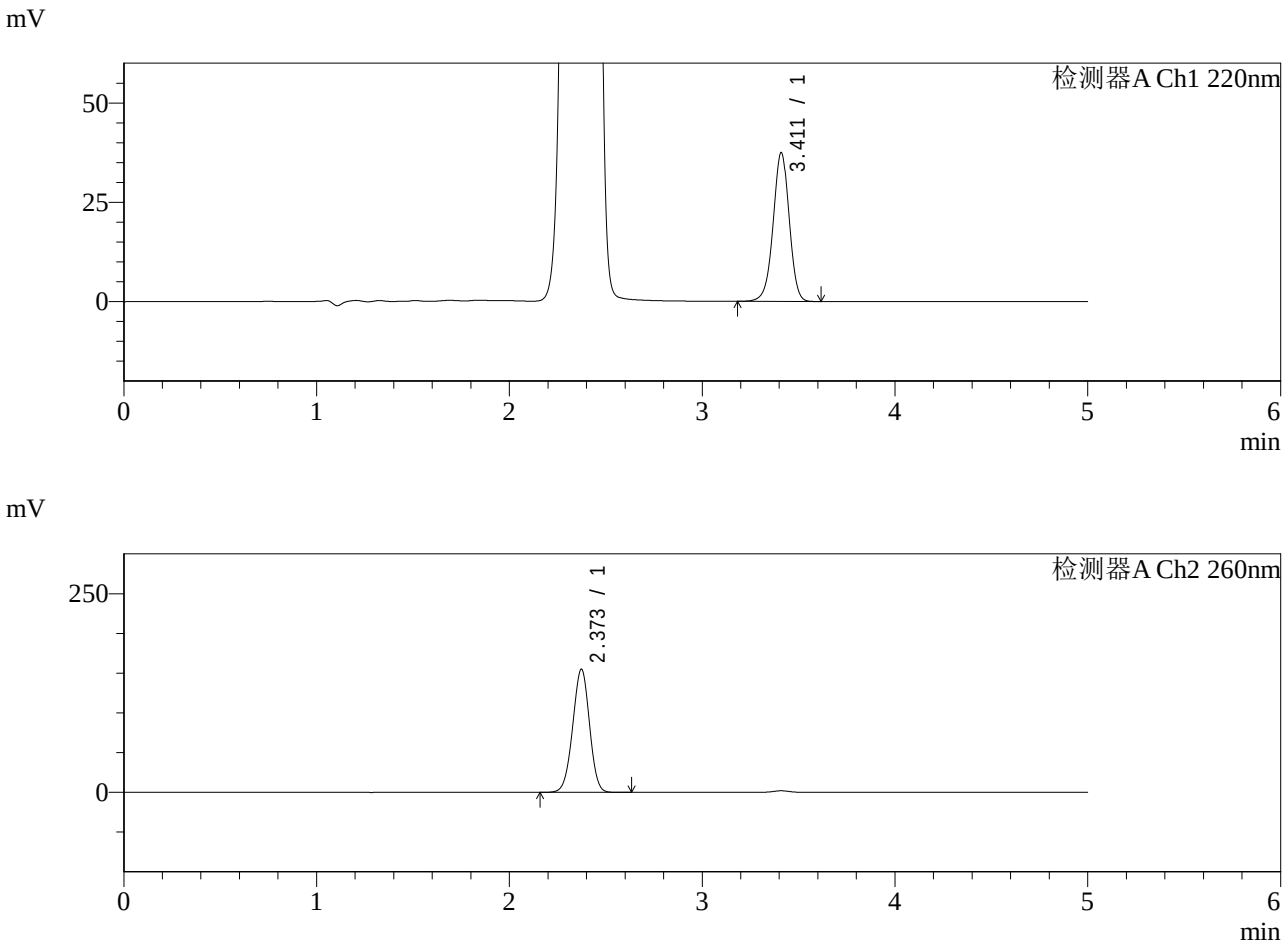

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	216206	100.000	37375	8226	0.969	--
总计		216206	100.000	37375			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	941298	100.000	154937	3507	0.975	--
总计		941298	100.000	154937			

图83 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-424-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-600min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 19:03:04
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

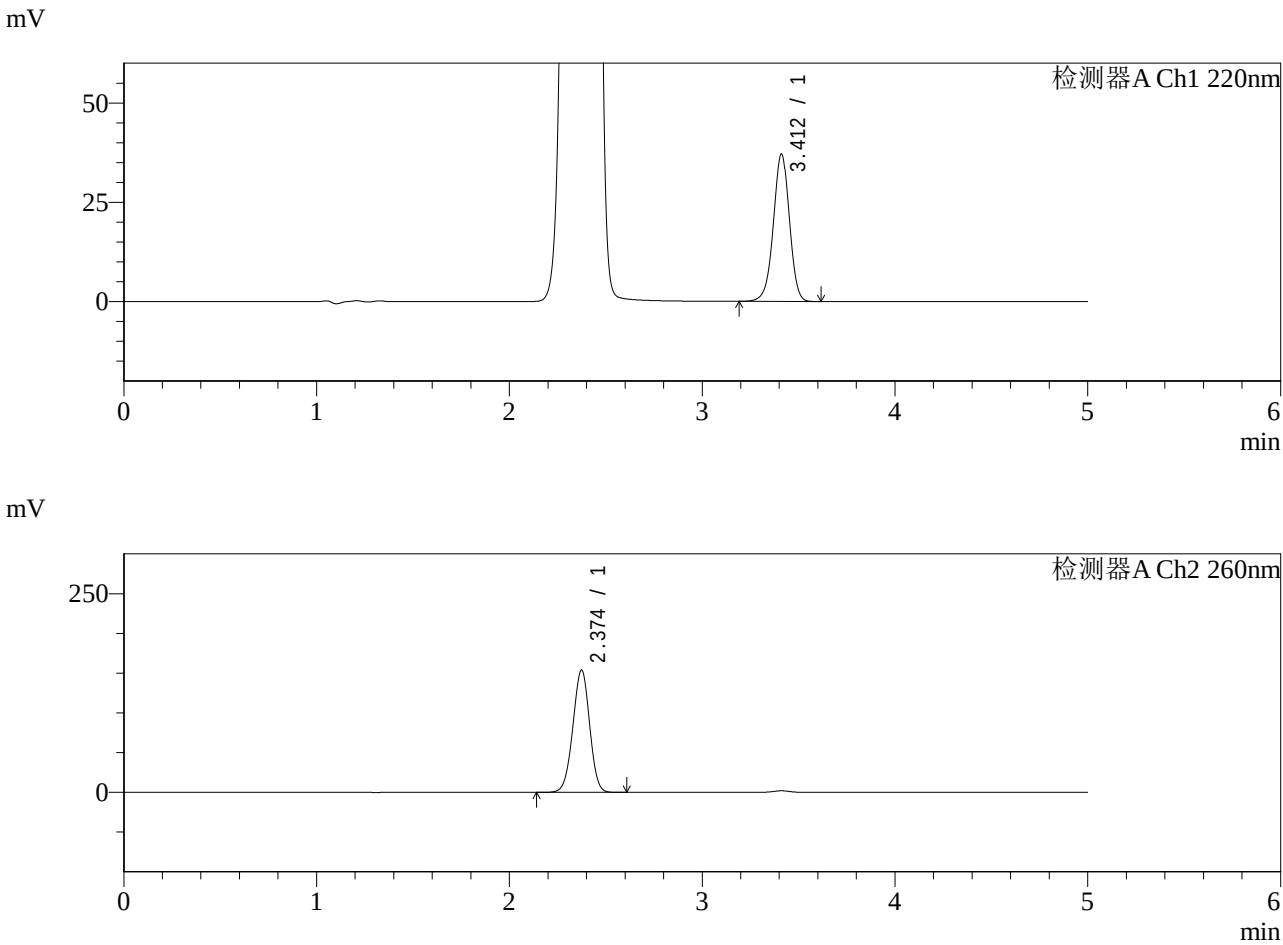

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	213977	100.000	37090	8250	0.969	--
总计		213977	100.000	37090			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	932851	100.000	153626	3520	0.975	--
总计		932851	100.000	153626			

图84 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-425-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-720min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 19:08:30
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

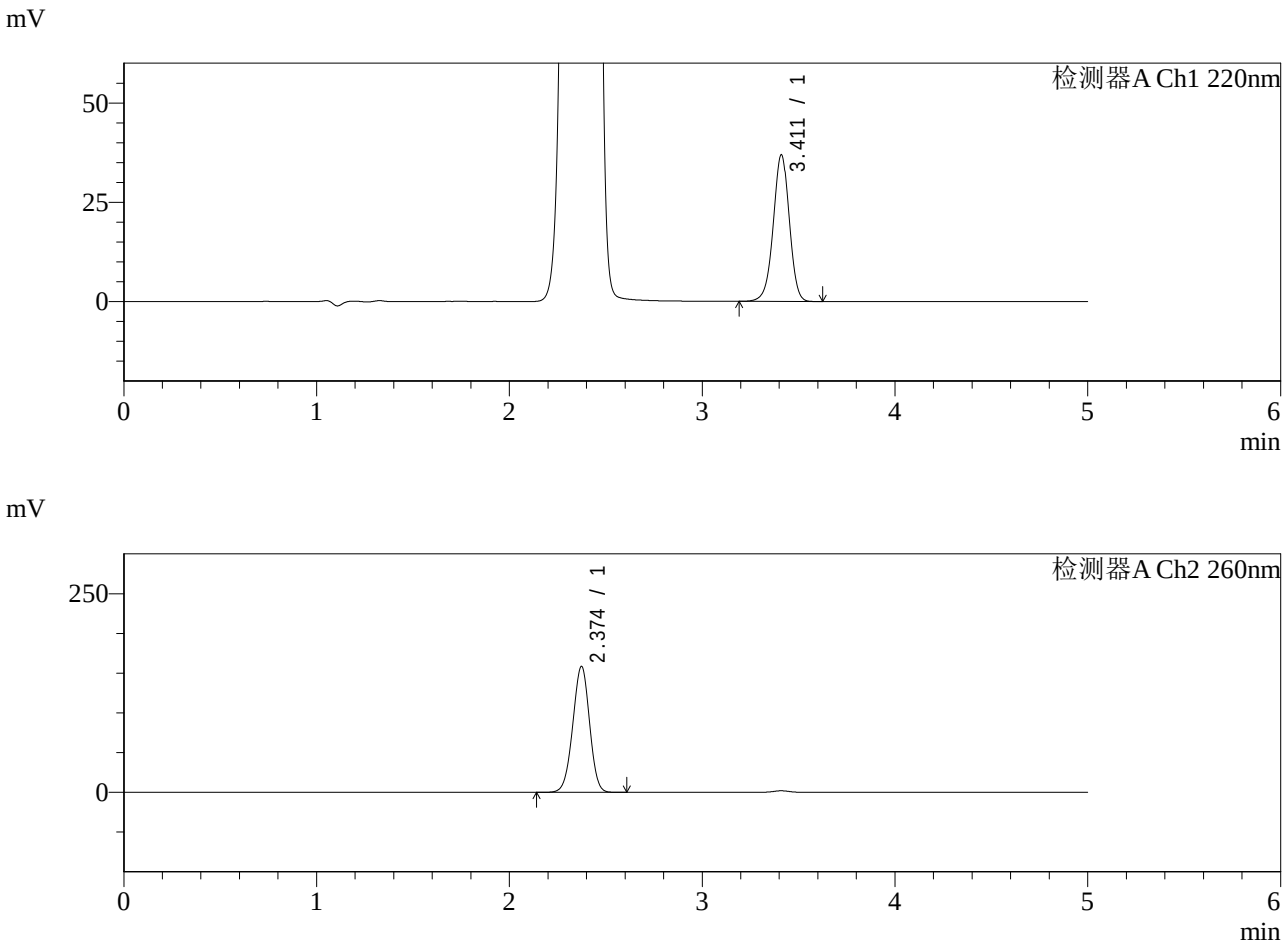

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	213096	100.000	36883	8240	0.970	--
总计		213096	100.000	36883			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	961392	100.000	158350	3518	0.973	--
总计		961392	100.000	158350			

图85 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-426-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-720min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 19:13:54
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

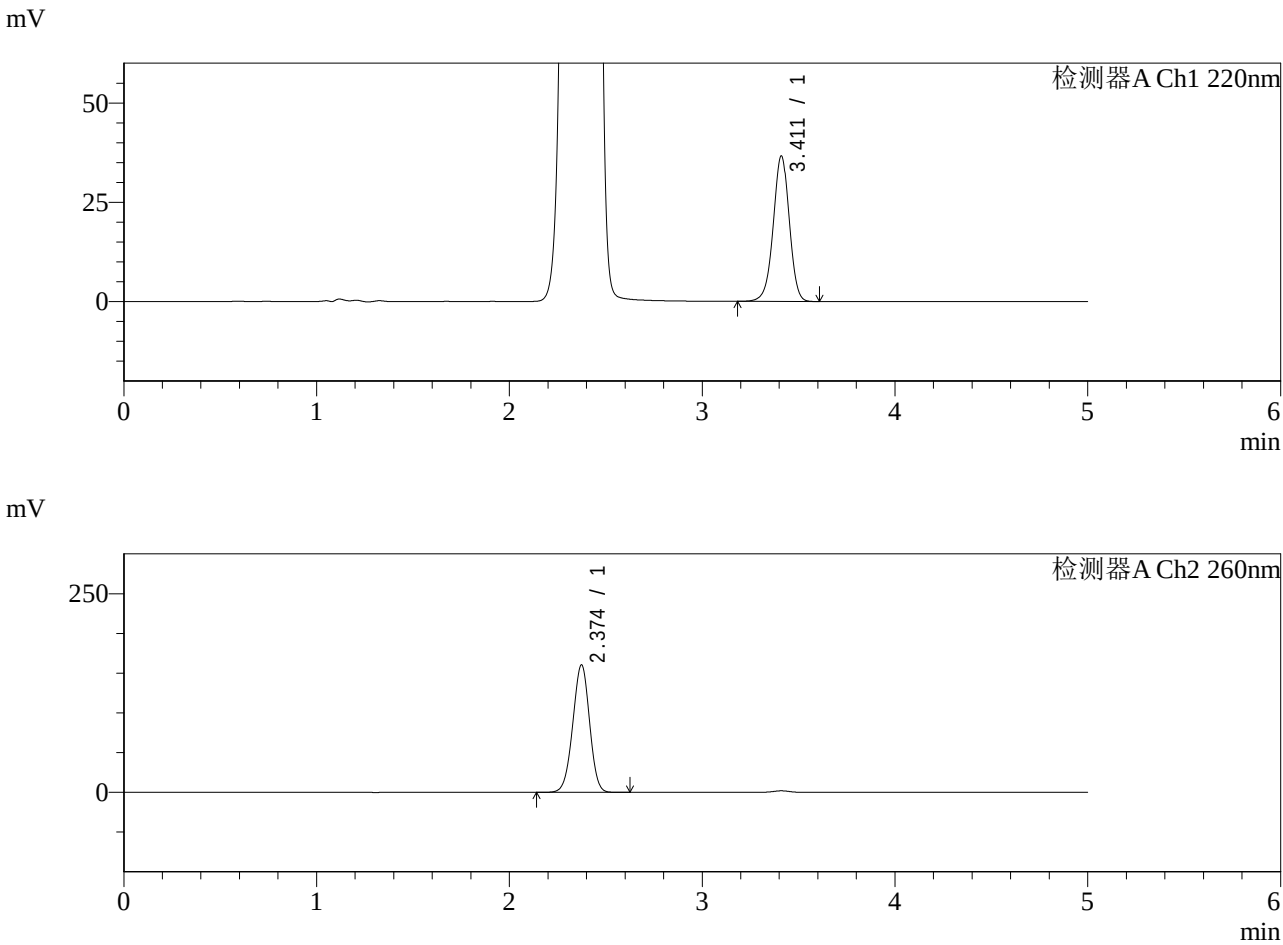

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	211273	100.000	36586	8256	0.969	--
总计		211273	100.000	36586			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	973245	100.000	160272	3515	0.973	--
总计		973245	100.000	160272			

图86 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-427-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-720min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 19:19:18
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

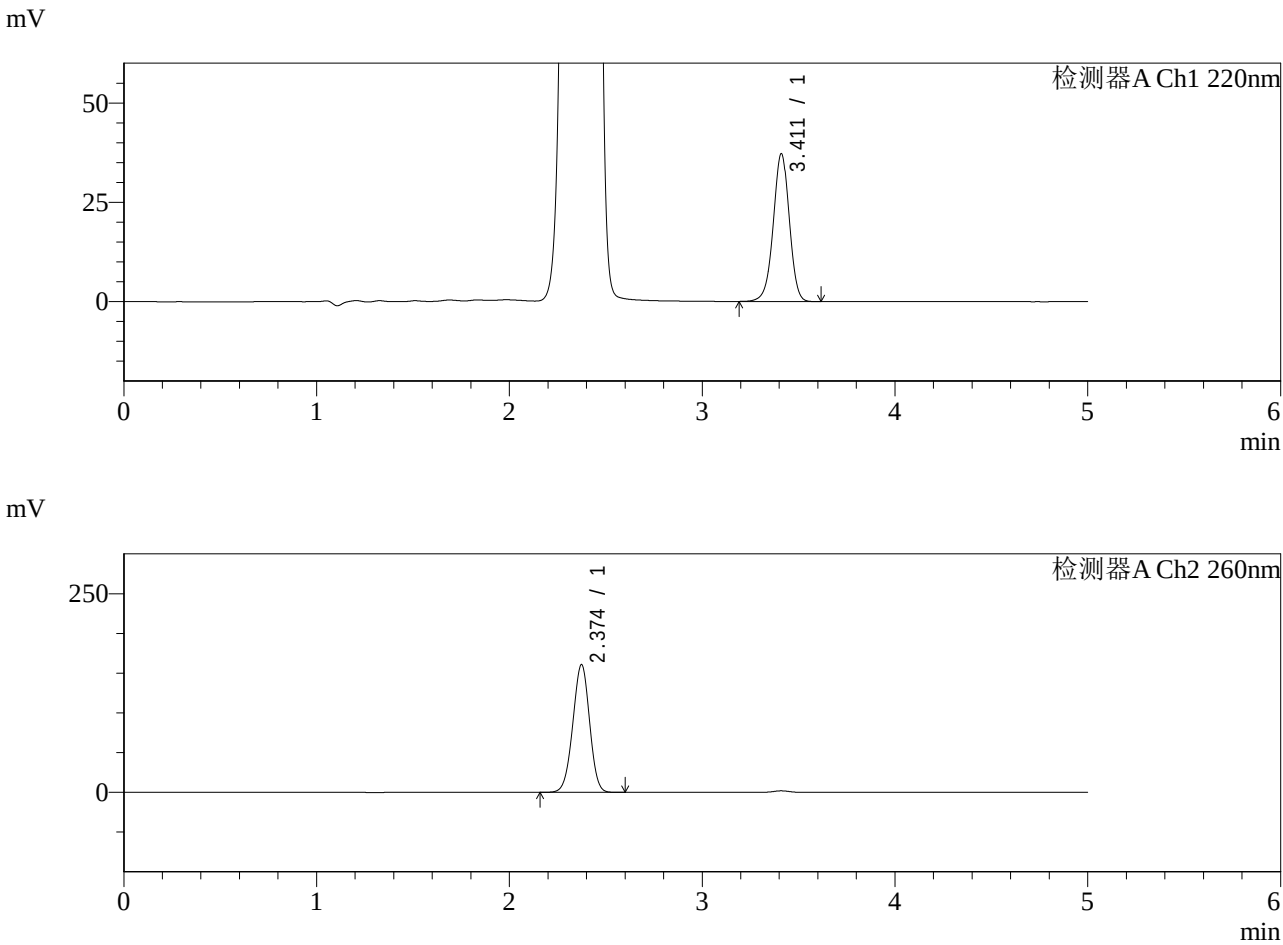

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	214620	100.000	37166	8243	0.970	--
总计		214620	100.000	37166			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	975377	100.000	160548	3514	0.973	--
总计		975377	100.000	160548			

图87 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片3
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-428-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-720min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 19:24:43
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

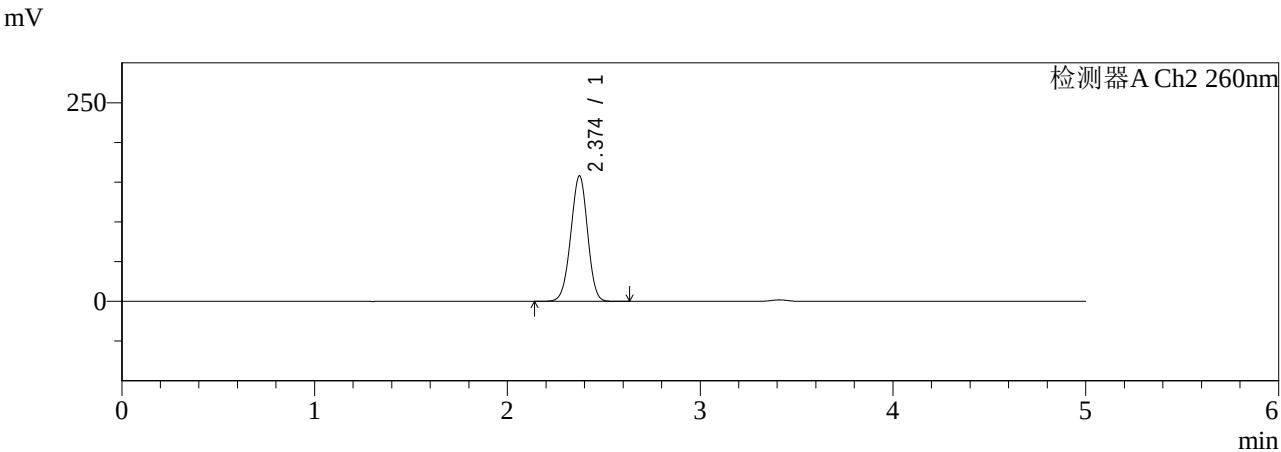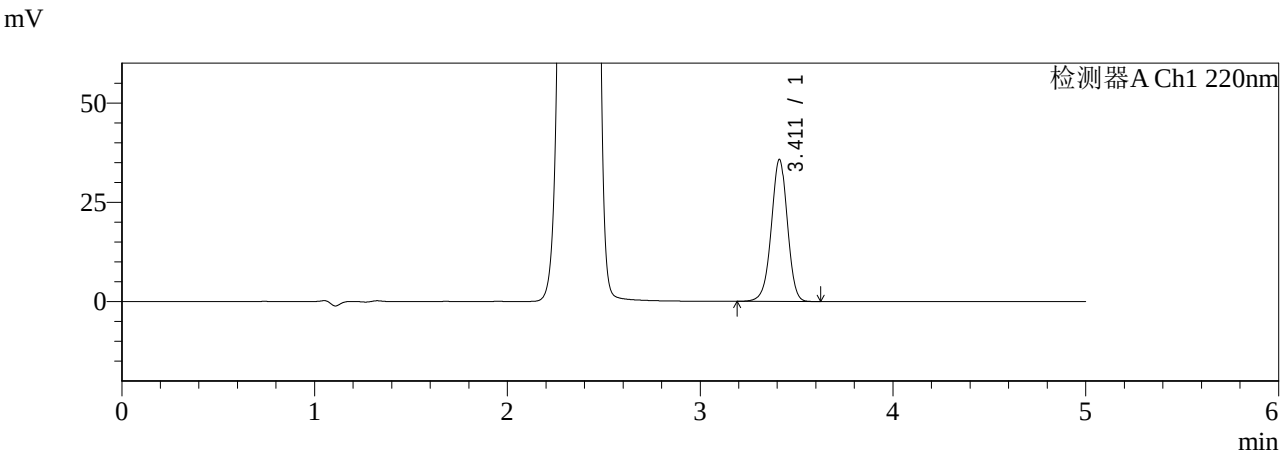

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	206027	100.000	35713	8254	0.971	--
总计		206027	100.000	35713			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	958870	100.000	157810	3511	0.975	--
总计		958870	100.000	157810			

图88 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-429-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-720min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 19:30:06
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

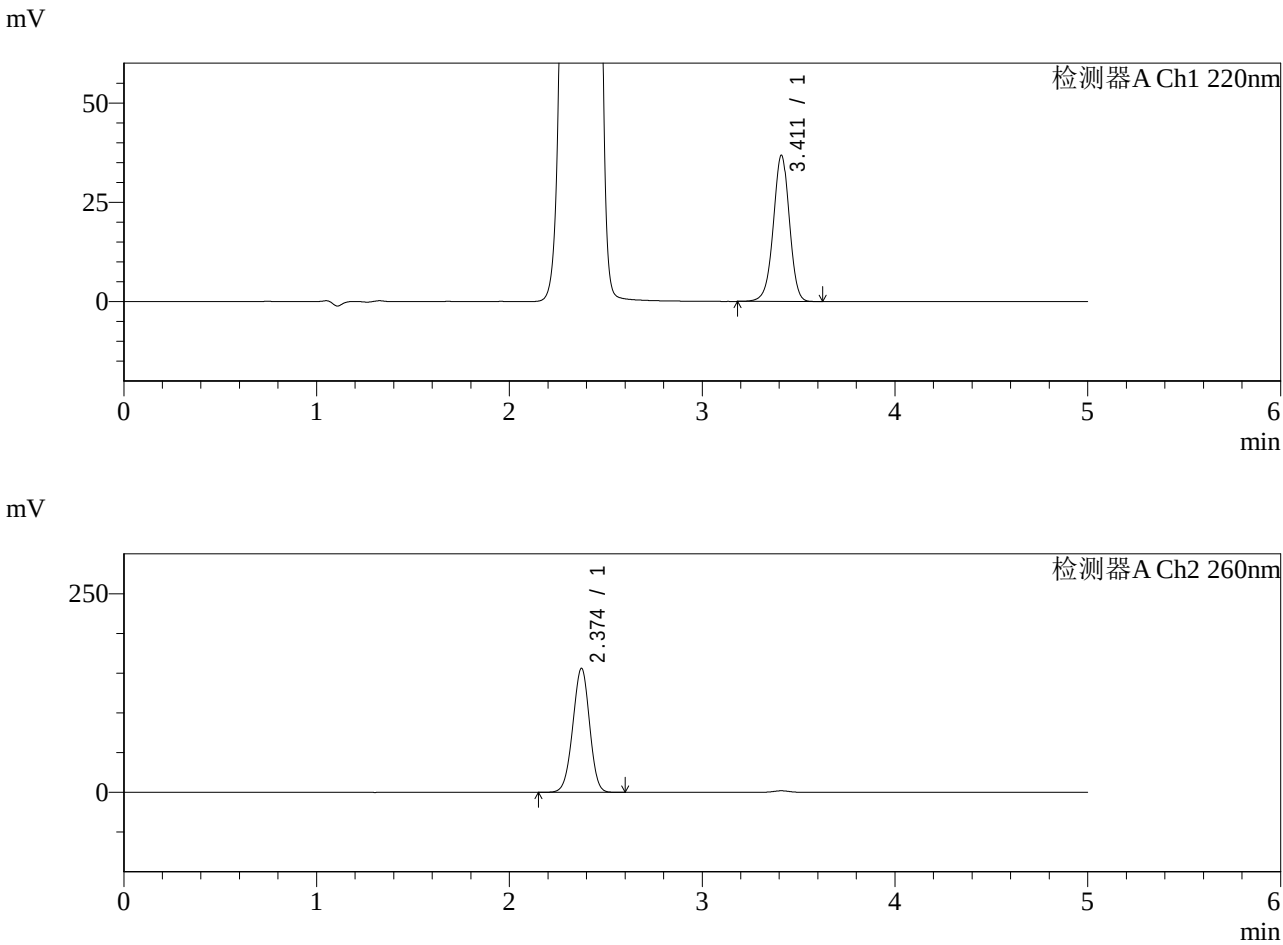

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	212259	100.000	36785	8261	0.970	--
总计		212259	100.000	36785			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	946149	100.000	155948	3517	0.975	--
总计		946149	100.000	155948			

图89 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片5
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-430-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-720min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 19:35:31
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

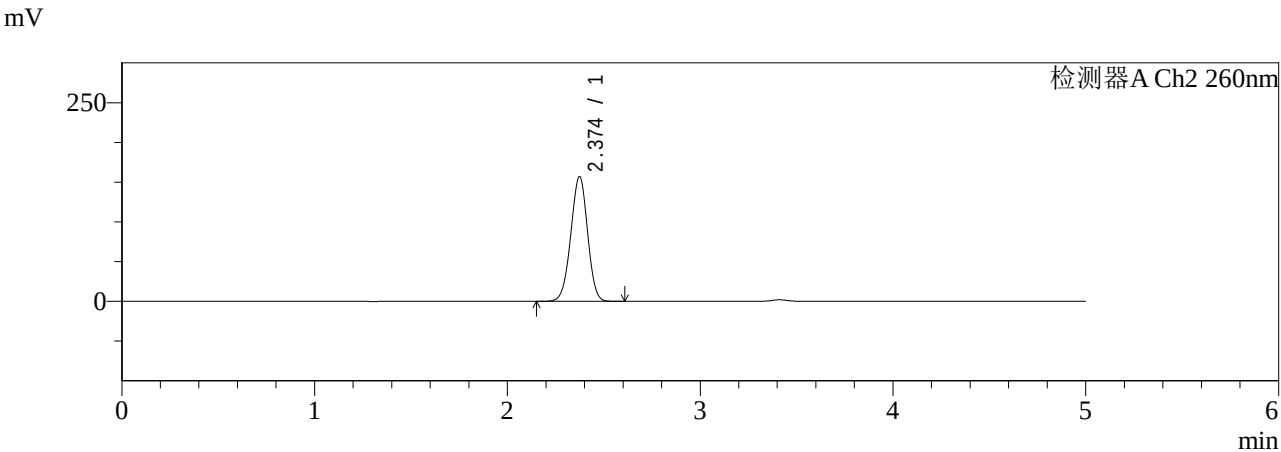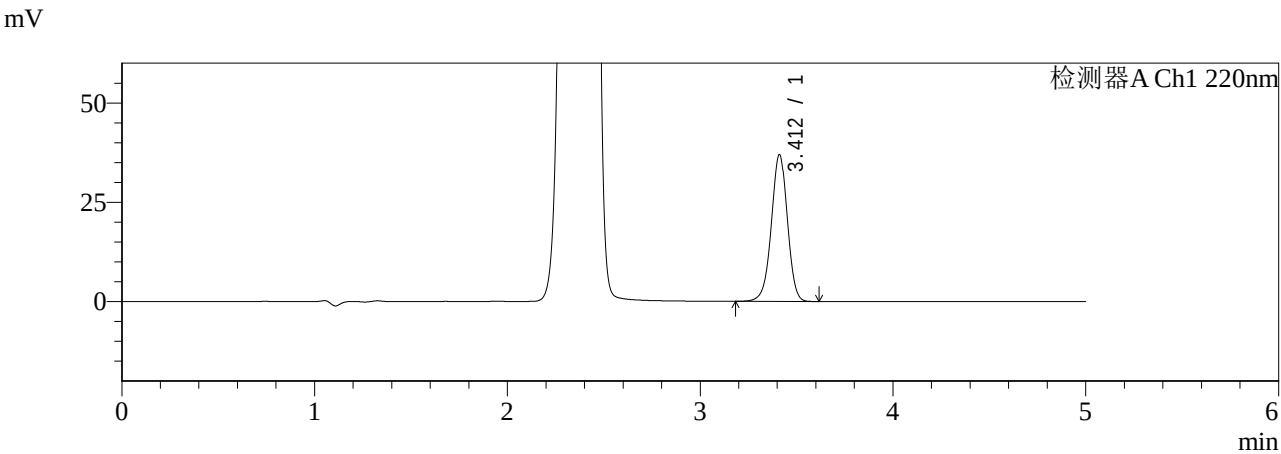

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	212928	100.000	36936	8260	0.971	--
总计		212928	100.000	36936			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	951570	100.000	156759	3515	0.975	--
总计		951570	100.000	156759			

图90 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-431-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 19:40:55
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

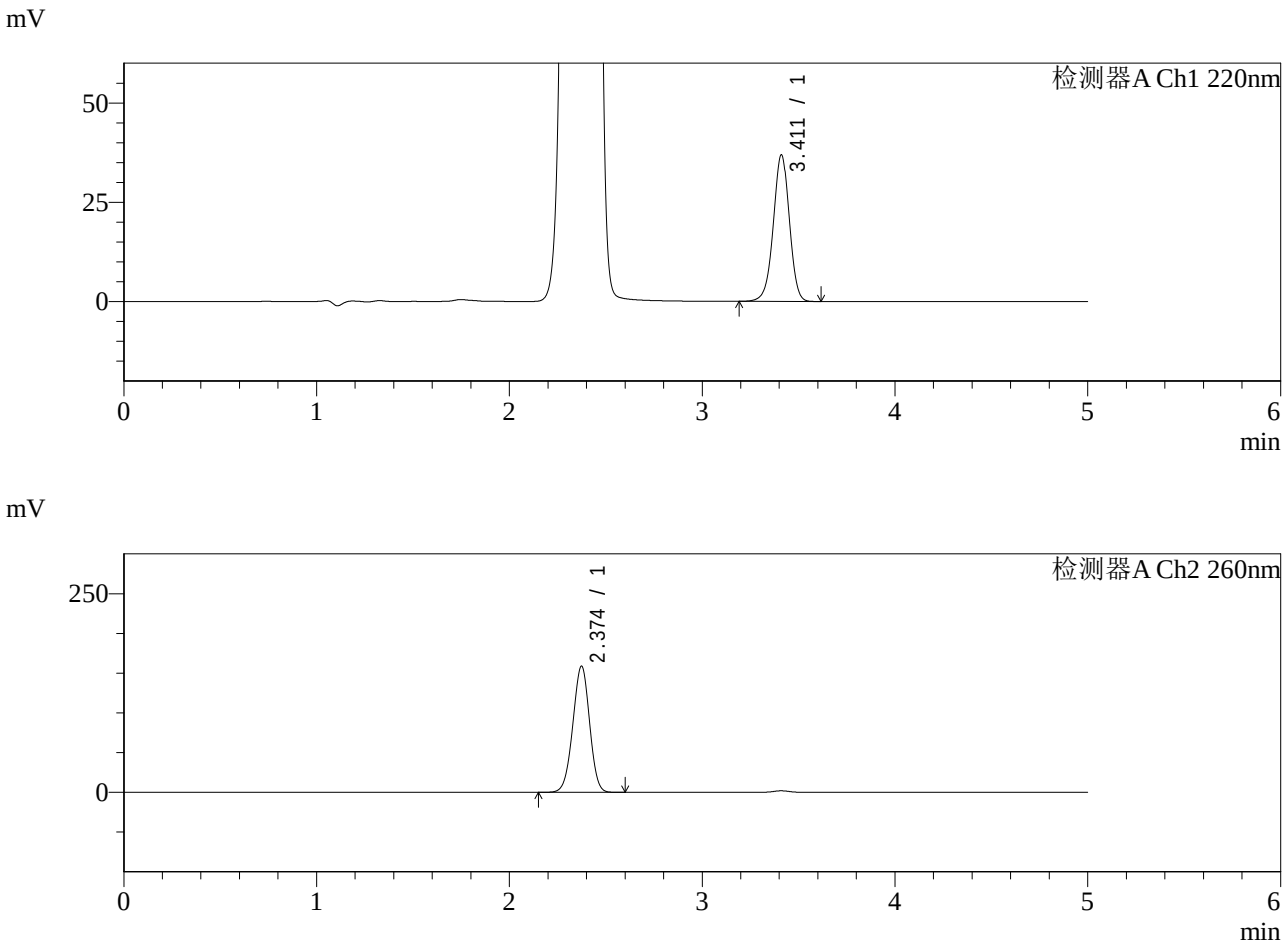

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	212603	100.000	36862	8254	0.971	--
总计		212603	100.000	36862			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	962106	100.000	158556	3520	0.973	--
总计		962106	100.000	158556			

图91 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-432-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 19:46:19
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

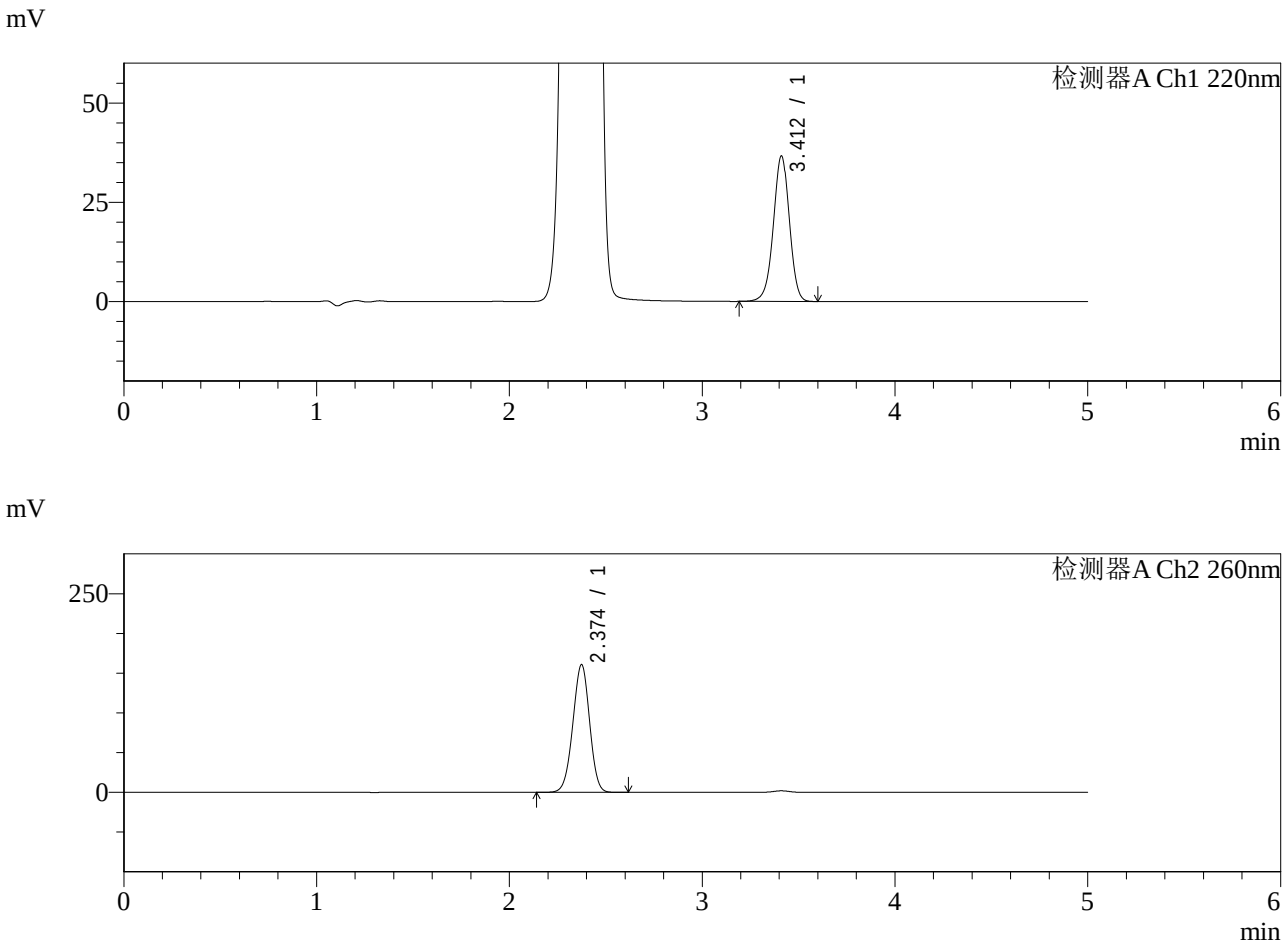

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	211028	100.000	36611	8266	0.972	--
总计		211028	100.000	36611			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	973822	100.000	160462	3521	0.974	--
总计		973822	100.000	160462			

图92 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-433-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 19:51:43
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

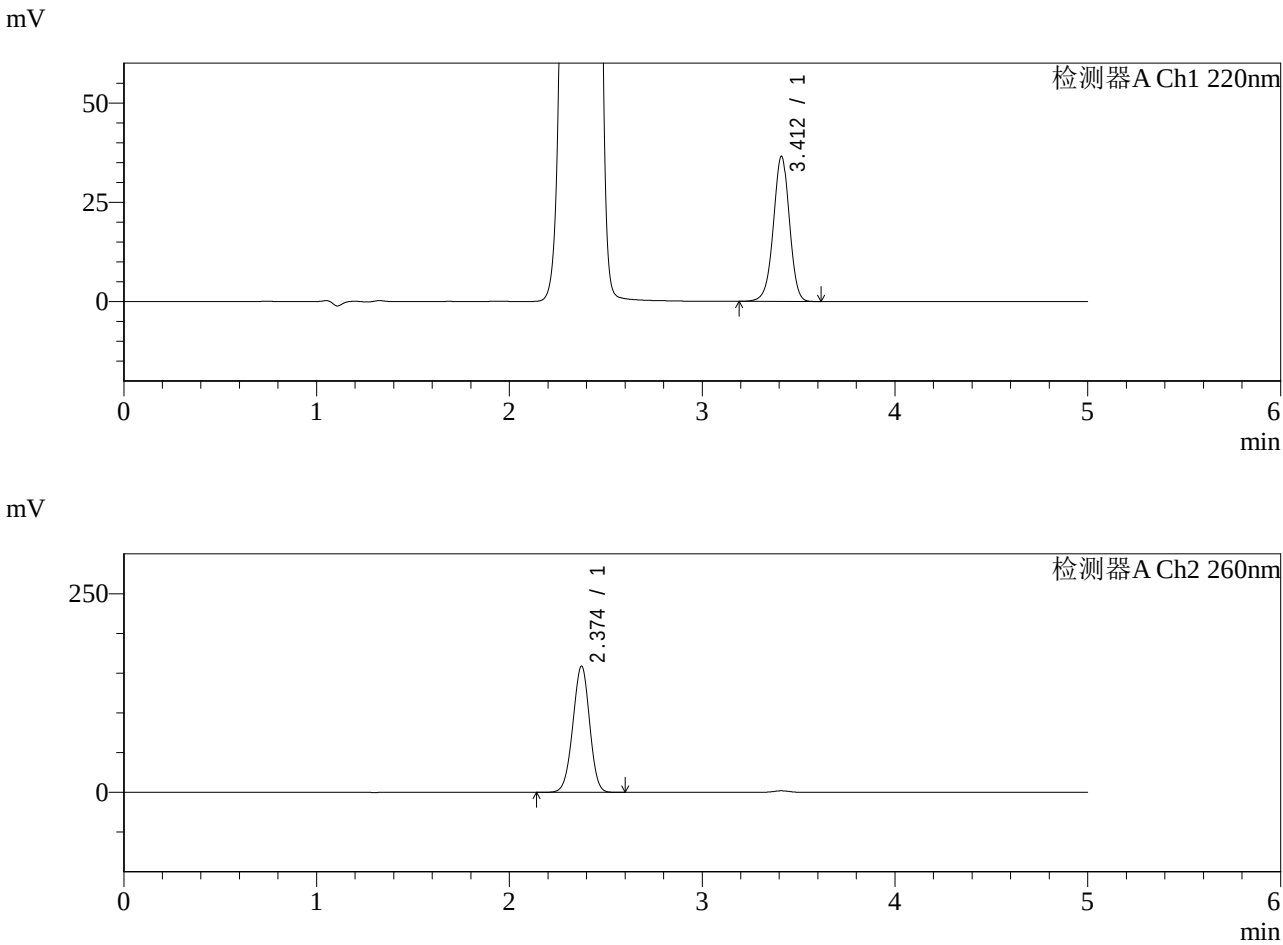

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	210412	100.000	36513	8259	0.972	--
总计		210412	100.000	36513			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	962669	100.000	158705	3524	0.974	--
总计		962669	100.000	158705			

图93 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-434-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 19:57:08
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

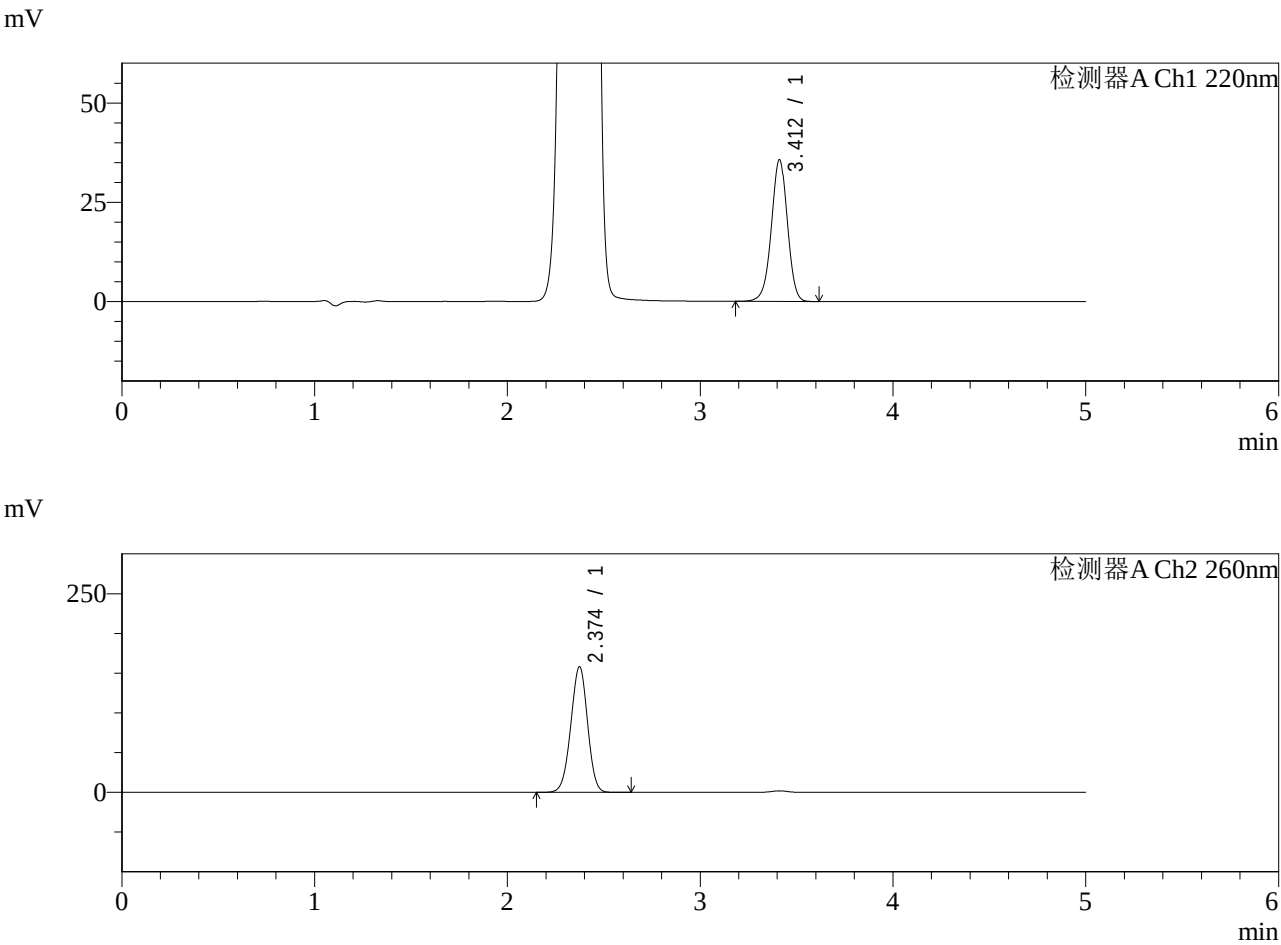

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	205401	100.000	35658	8264	0.972	--
总计		205401	100.000	35658			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	958007	100.000	157934	3521	0.975	--
总计		958007	100.000	157934			

图94 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-435-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 20:02:32
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

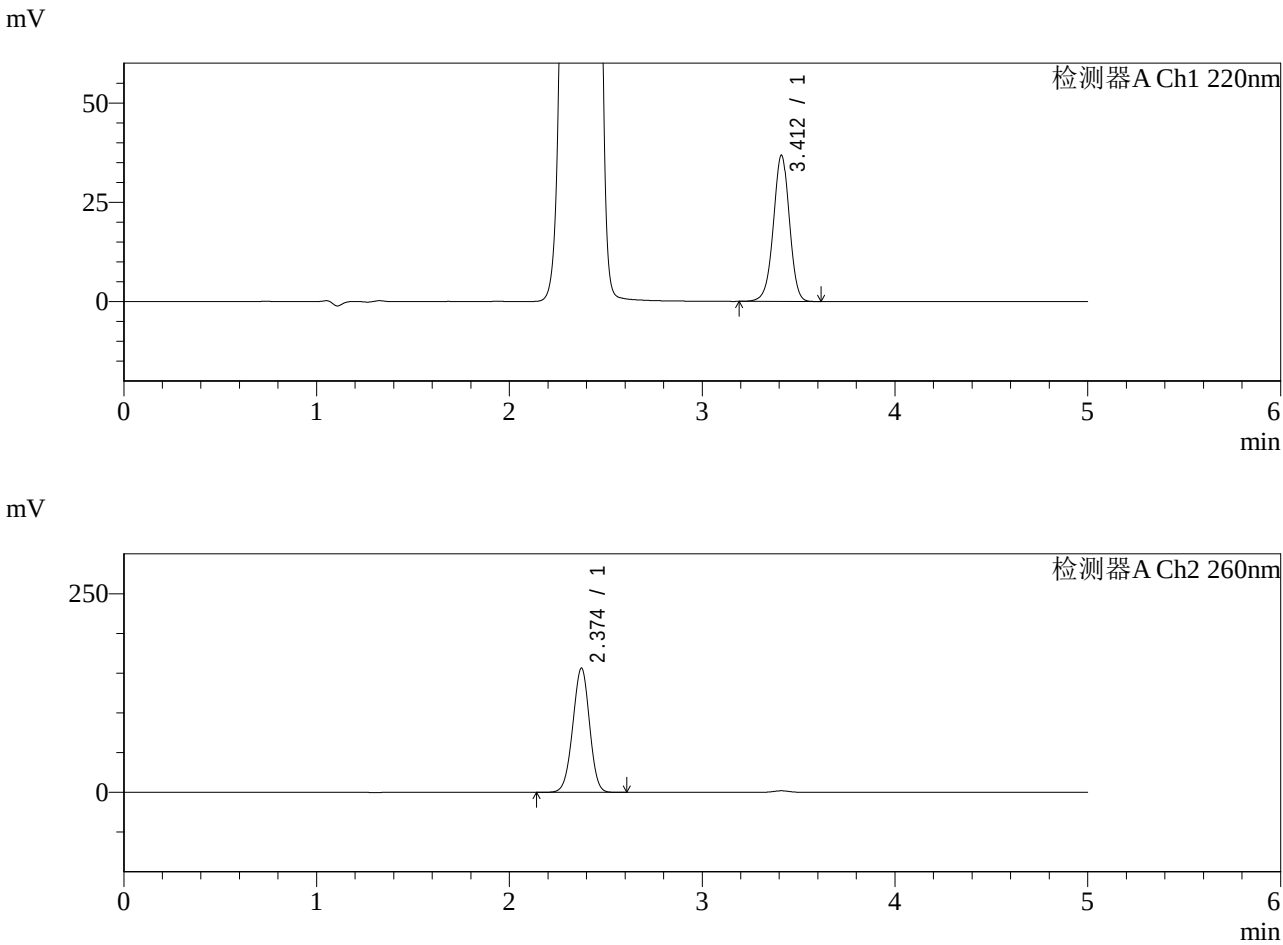

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	211782	100.000	36786	8273	0.973	--
总计		211782	100.000	36786			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	946441	100.000	156193	3524	0.976	--
总计		946441	100.000	156193			

图95 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-436-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 20:07:56
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:18:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

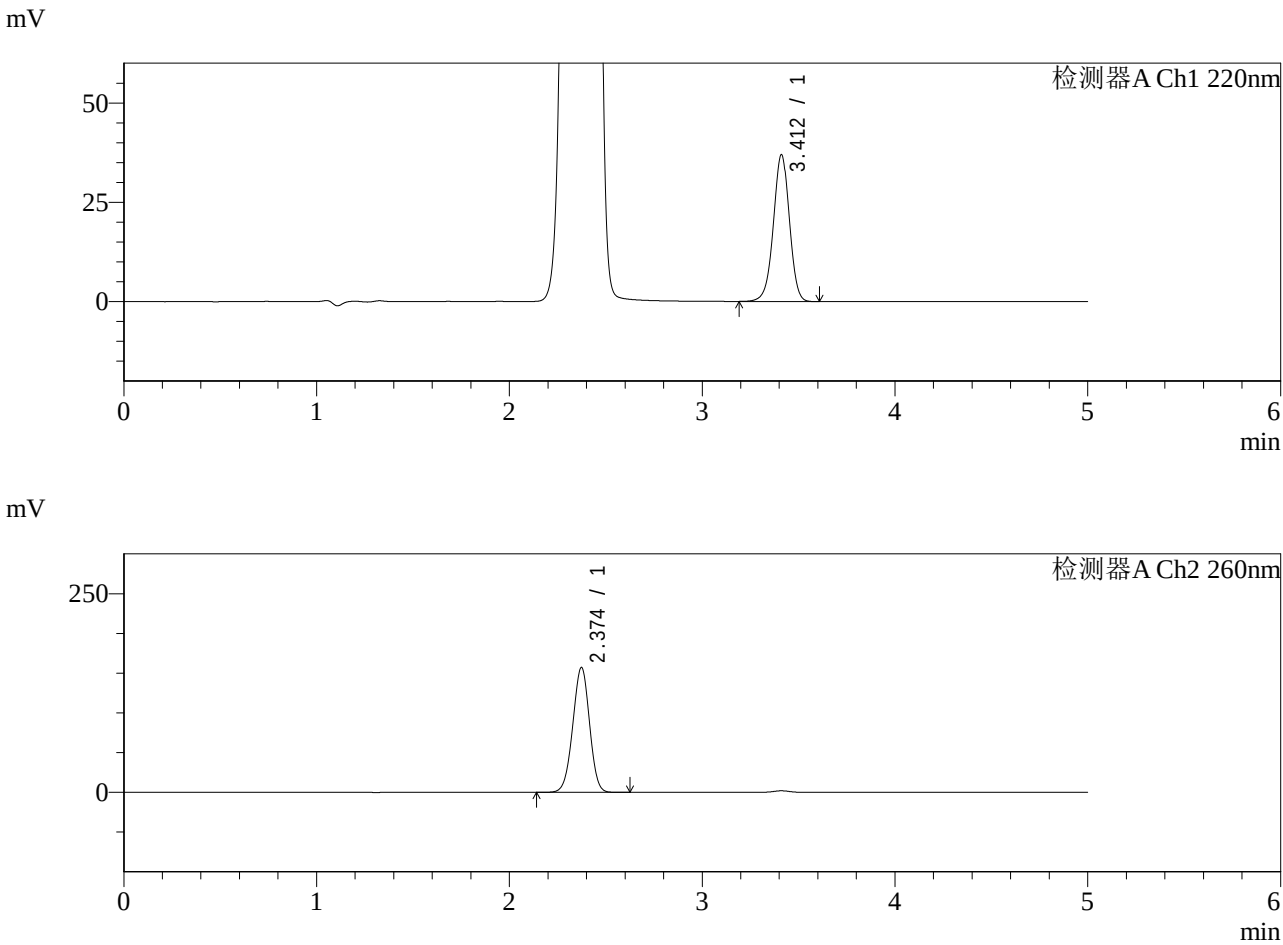

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	212550	100.000	36926	8275	0.972	--
总计		212550	100.000	36926			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	952168	100.000	157060	3521	0.976	--
总计		952168	100.000	157060			

图96 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-437-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 20:13:20
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

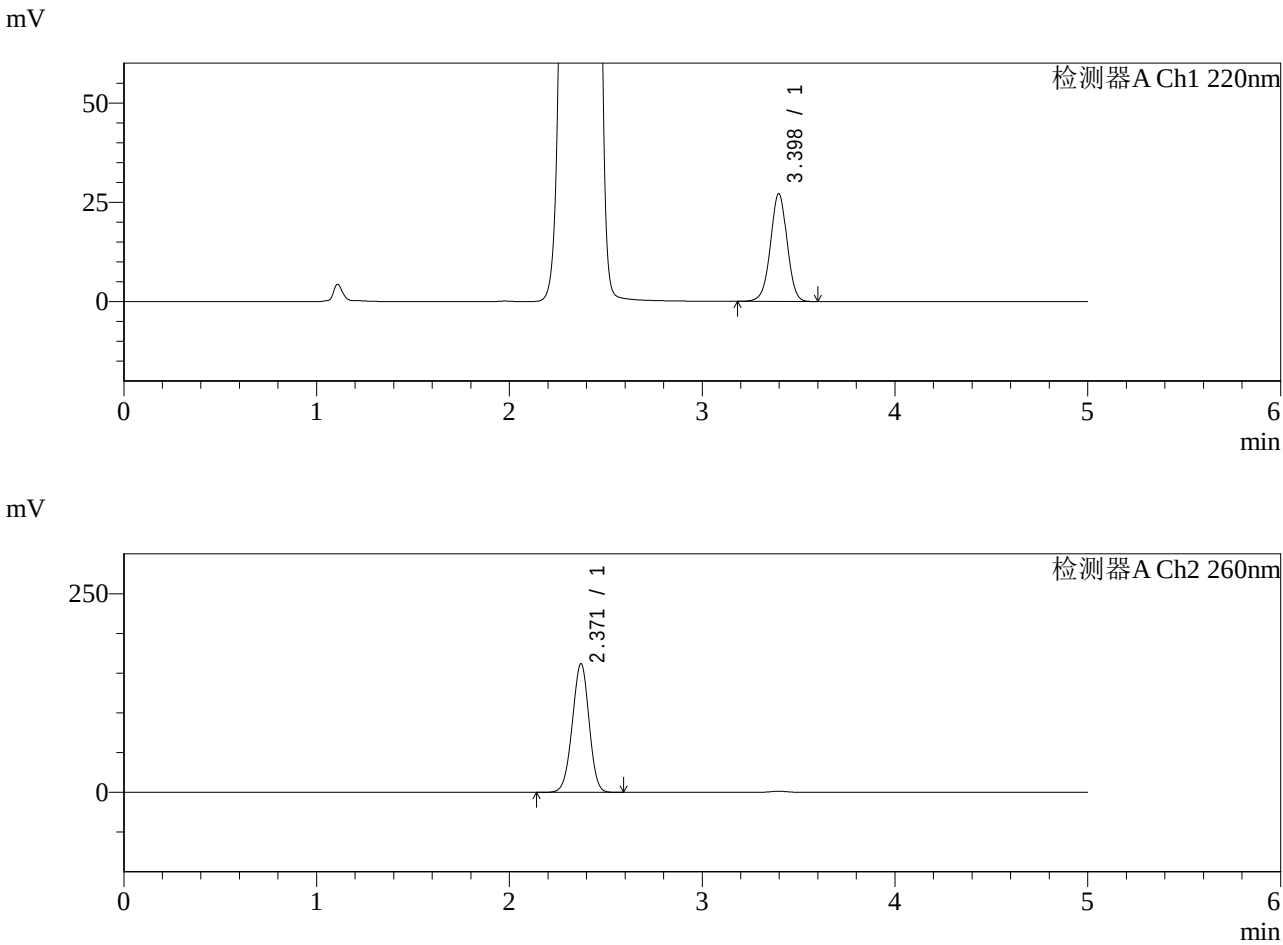

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.398	162369	100.000	27134	7558	0.985	--
总计		162369	100.000	27134			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	981309	100.000	161989	3509	0.973	--
总计		981309	100.000	161989			

图97 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-438-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 20:18:43
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

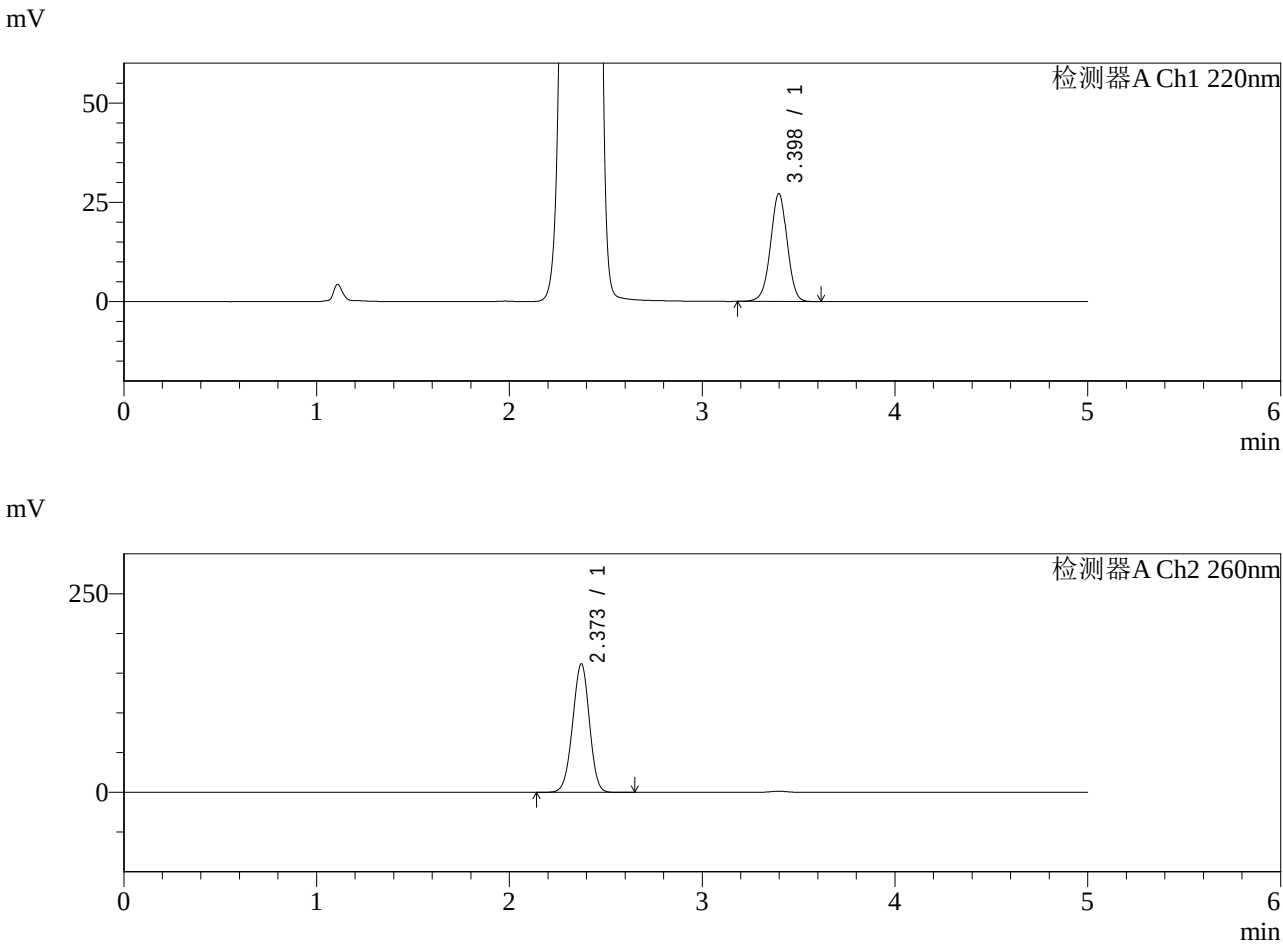

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.398	162427	100.000	27121	7555	0.986	--
总计		162427	100.000	27121			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	981963	100.000	161837	3507	0.974	--
总计		981963	100.000	161837			

图98 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-439-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 20:24:06
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

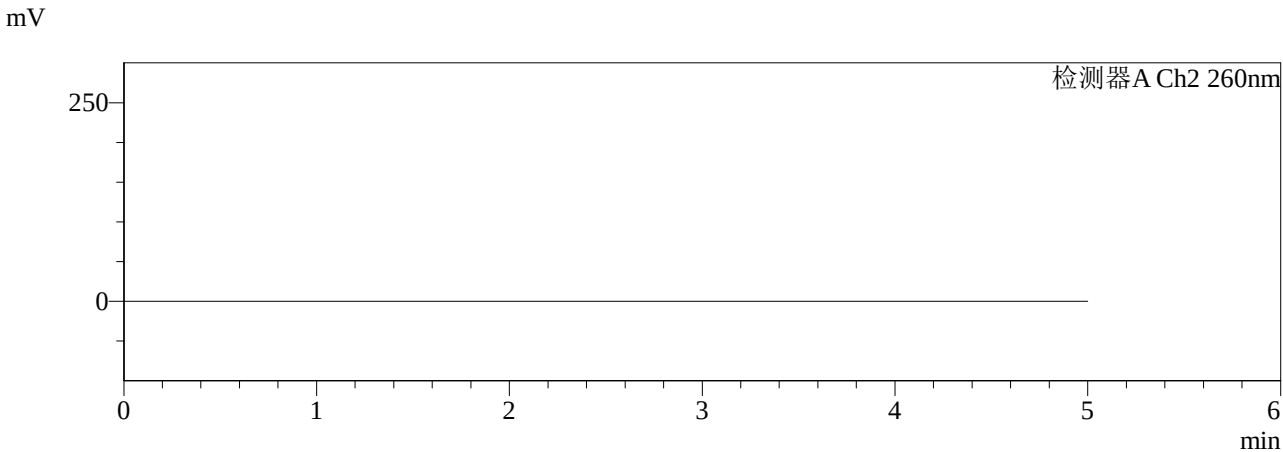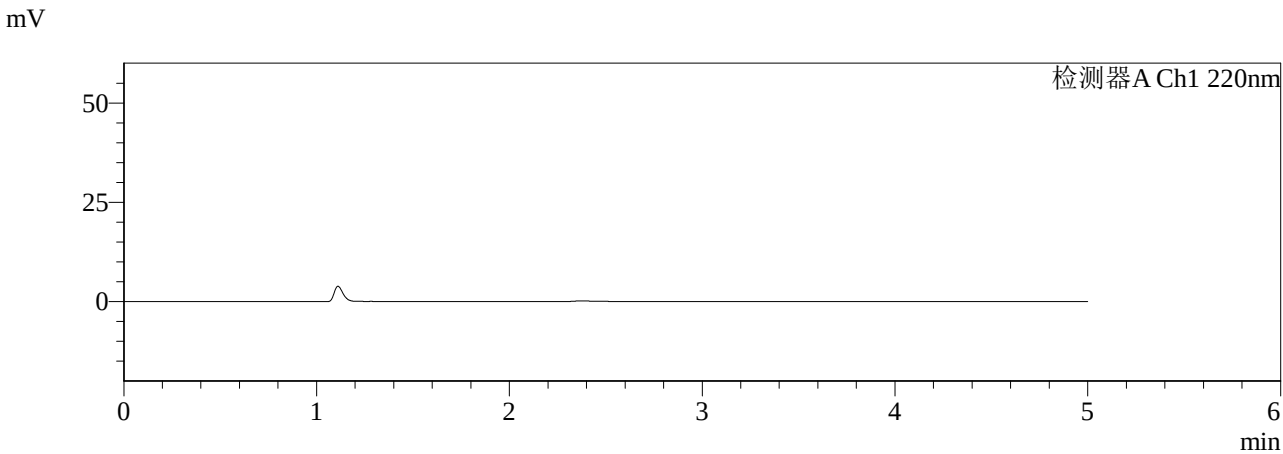

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图99 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-440-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 20:29:29
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

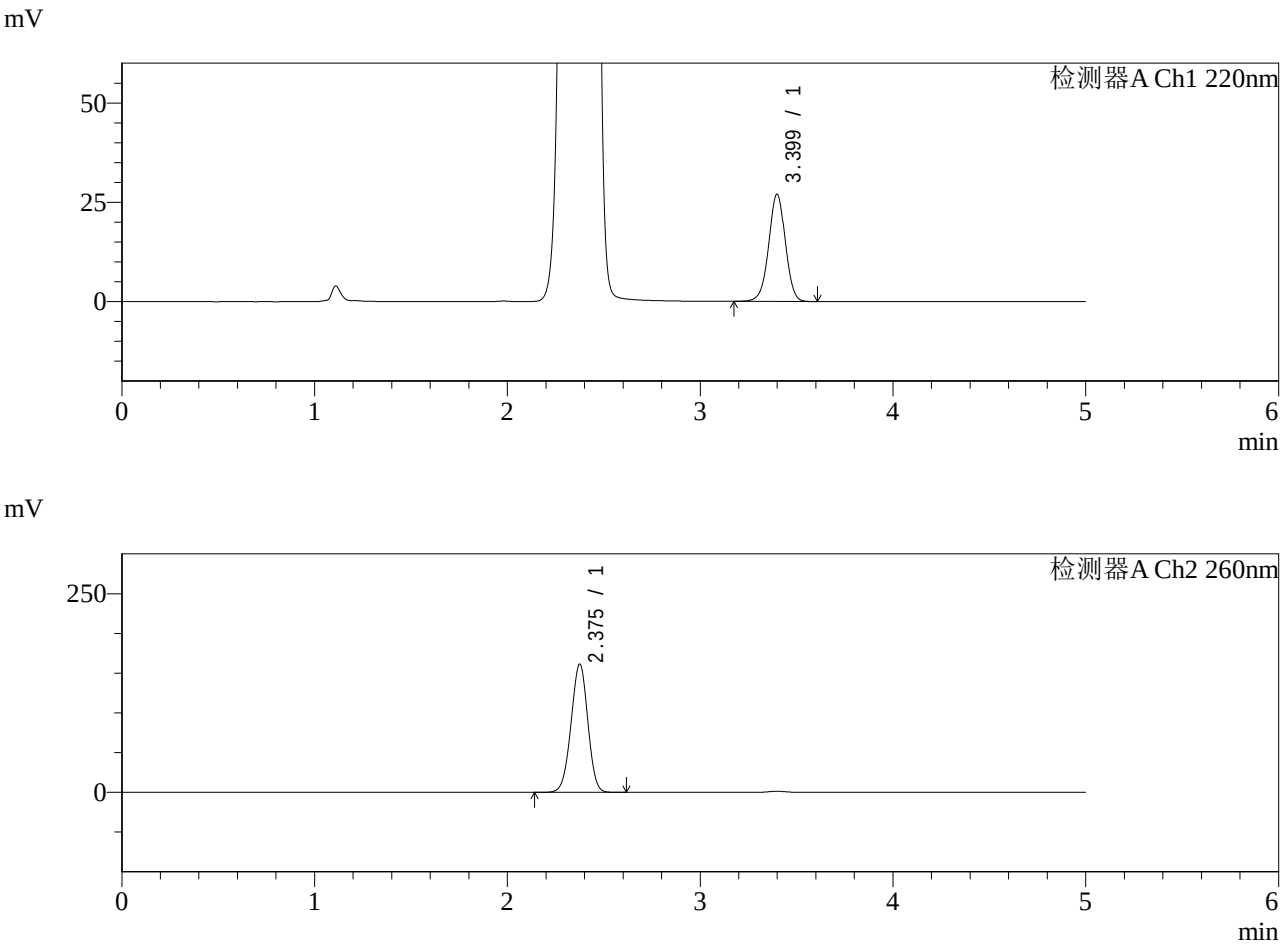

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.399	161732	100.000	26968	7561	0.985	--
总计		161732	100.000	26968			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	979125	100.000	160771	3515	0.975	--
总计		979125	100.000	160771			

图100 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-441-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 20:34:52
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

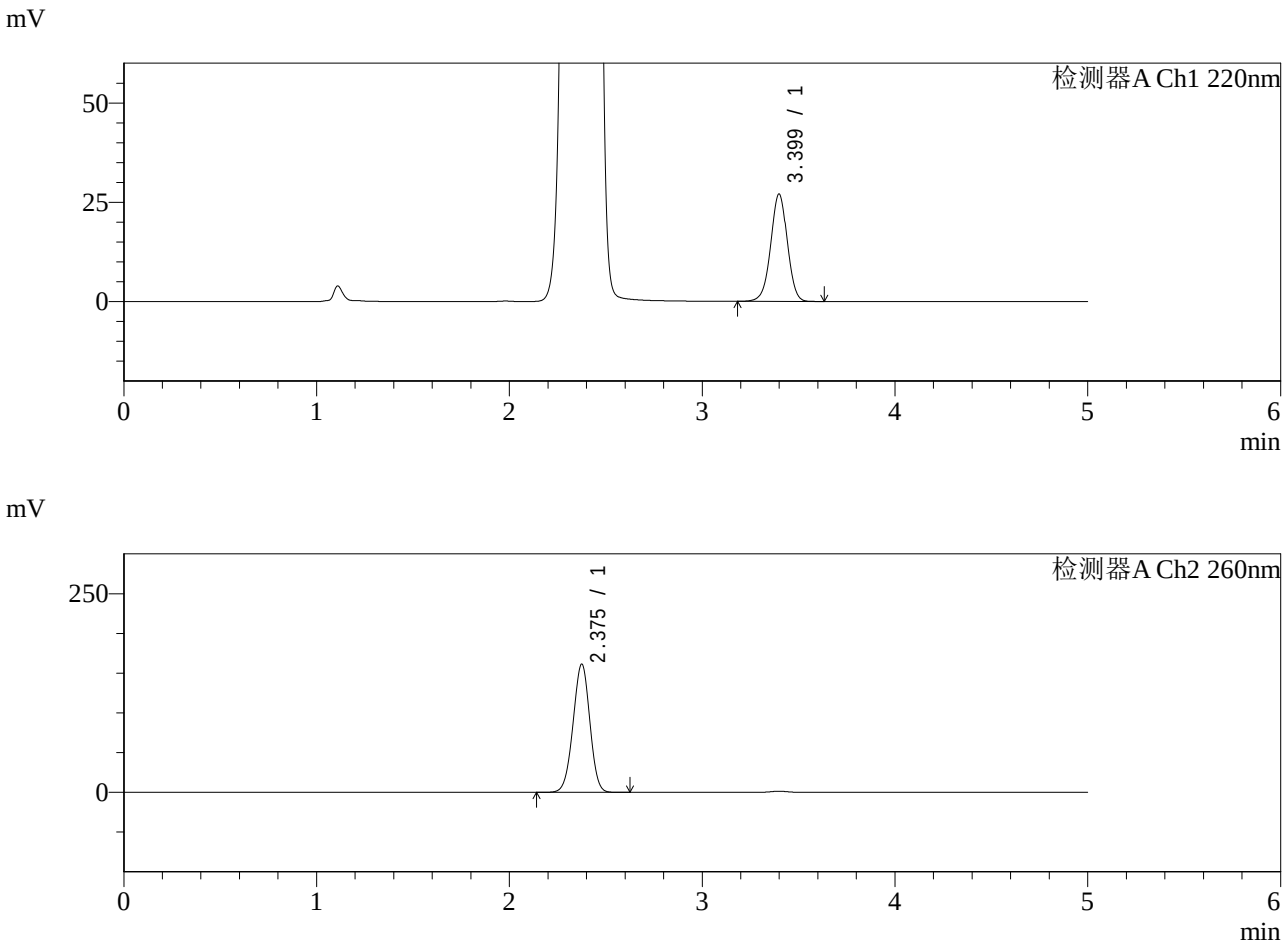

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.399	161811	100.000	26981	7561	0.986	--
总计		161811	100.000	26981			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	979083	100.000	160766	3512	0.975	--
总计		979083	100.000	160766			

图101 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-442-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 20:40:15
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

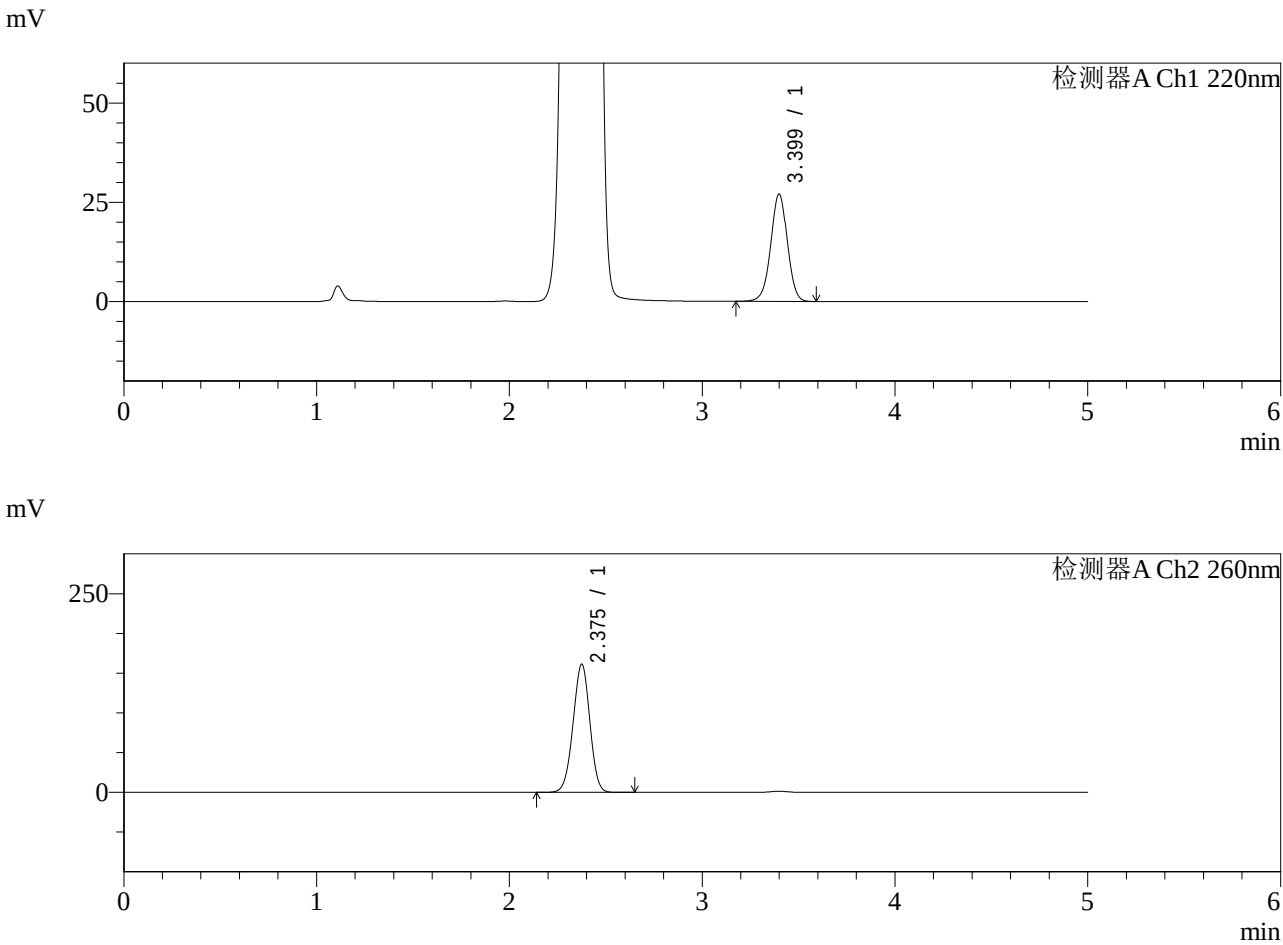

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.399	161713	100.000	26962	7565	0.986	--
总计		161713	100.000	26962			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	978926	100.000	160711	3515	0.975	--
总计		978926	100.000	160711			

图102 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-443-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 20:45:39
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

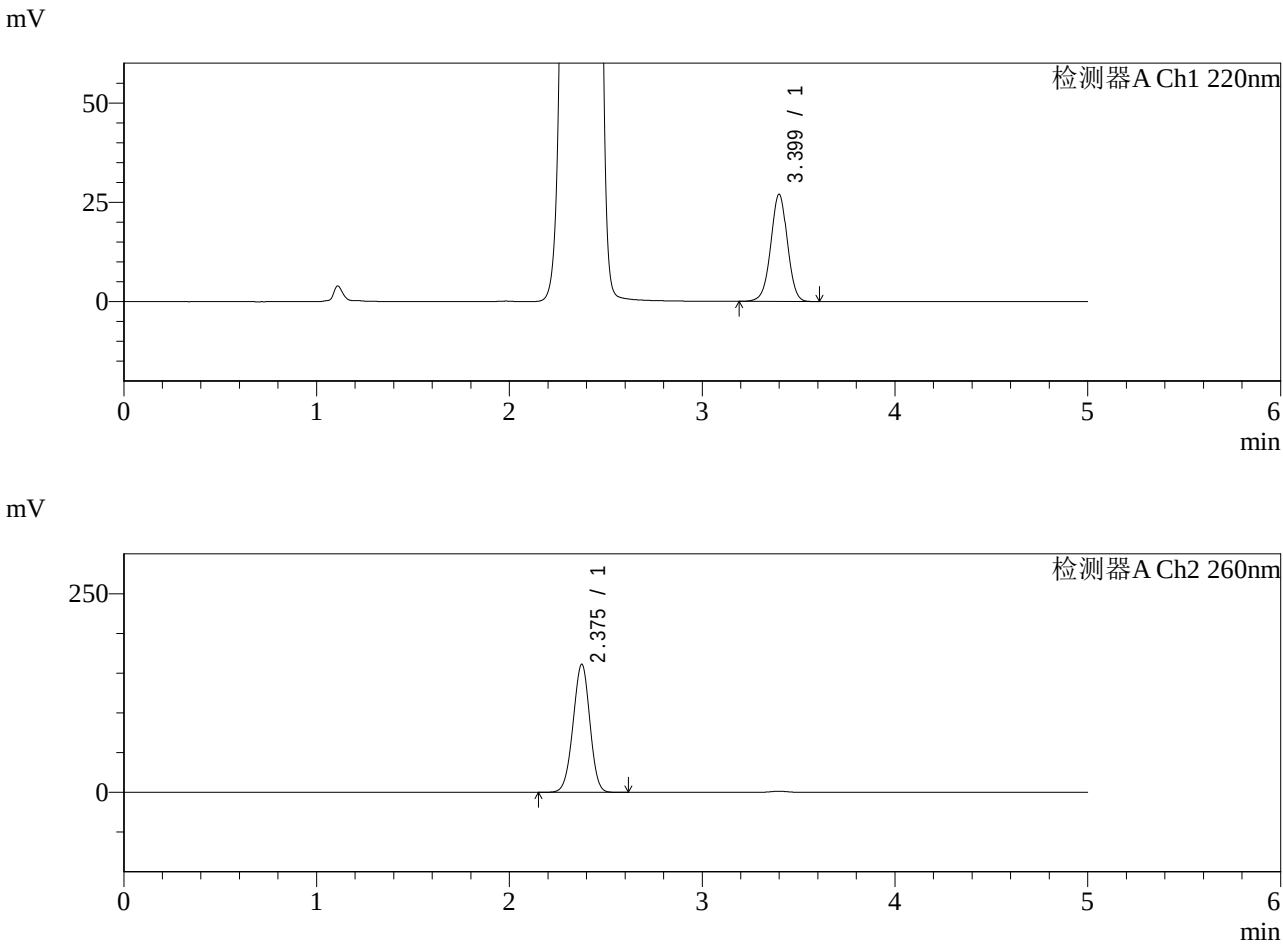

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.399	161404	100.000	26932	7570	0.987	--
总计		161404	100.000	26932			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	978025	100.000	160600	3514	0.975	--
总计		978025	100.000	160600			

图103 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-444-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 20:51:01
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

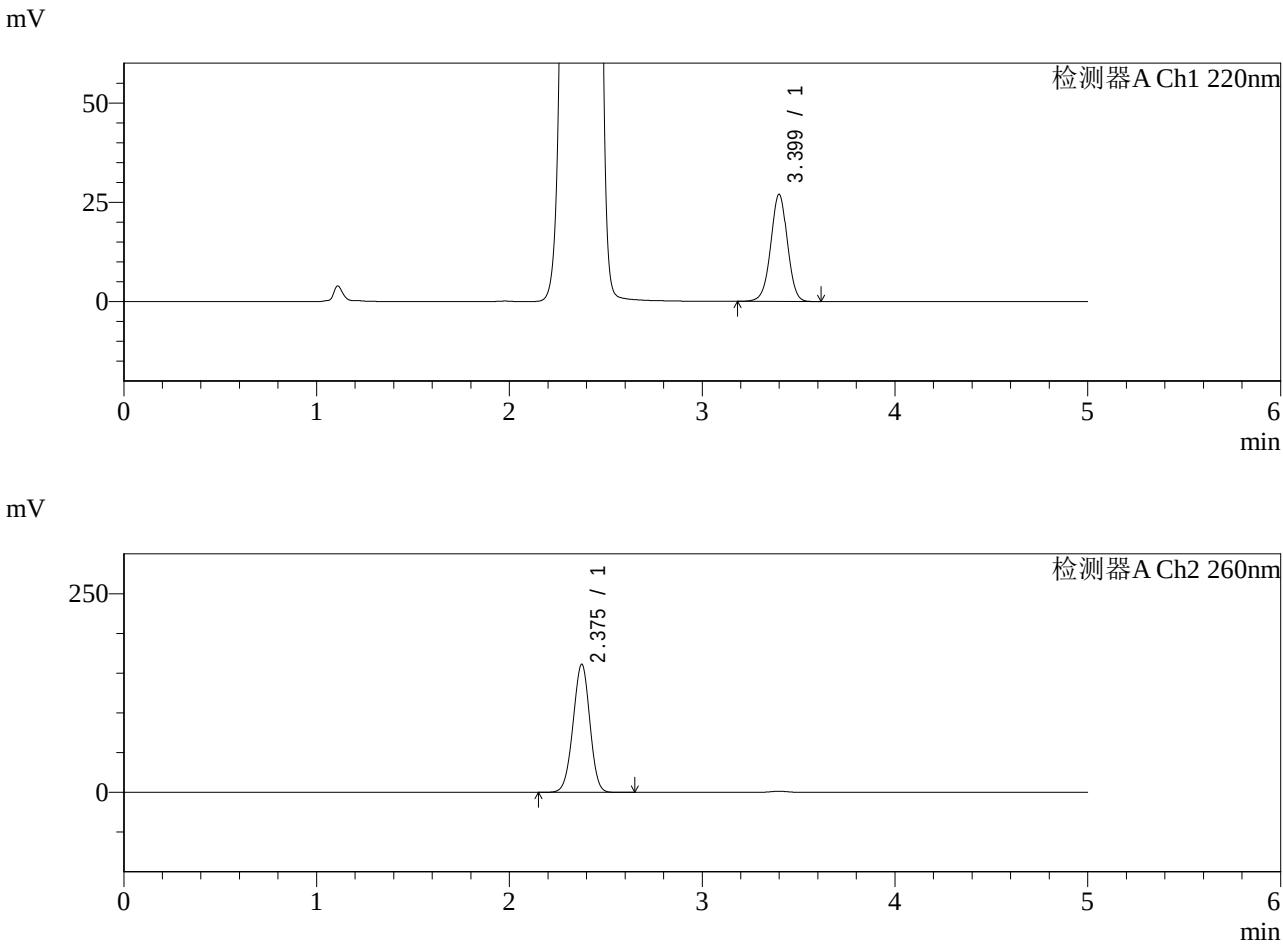

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.399	161624	100.000	26936	7571	0.986	--
总计		161624	100.000	26936			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	977843	100.000	160612	3514	0.975	--
总计		977843	100.000	160612			

图104 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-445-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 20:56:23
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

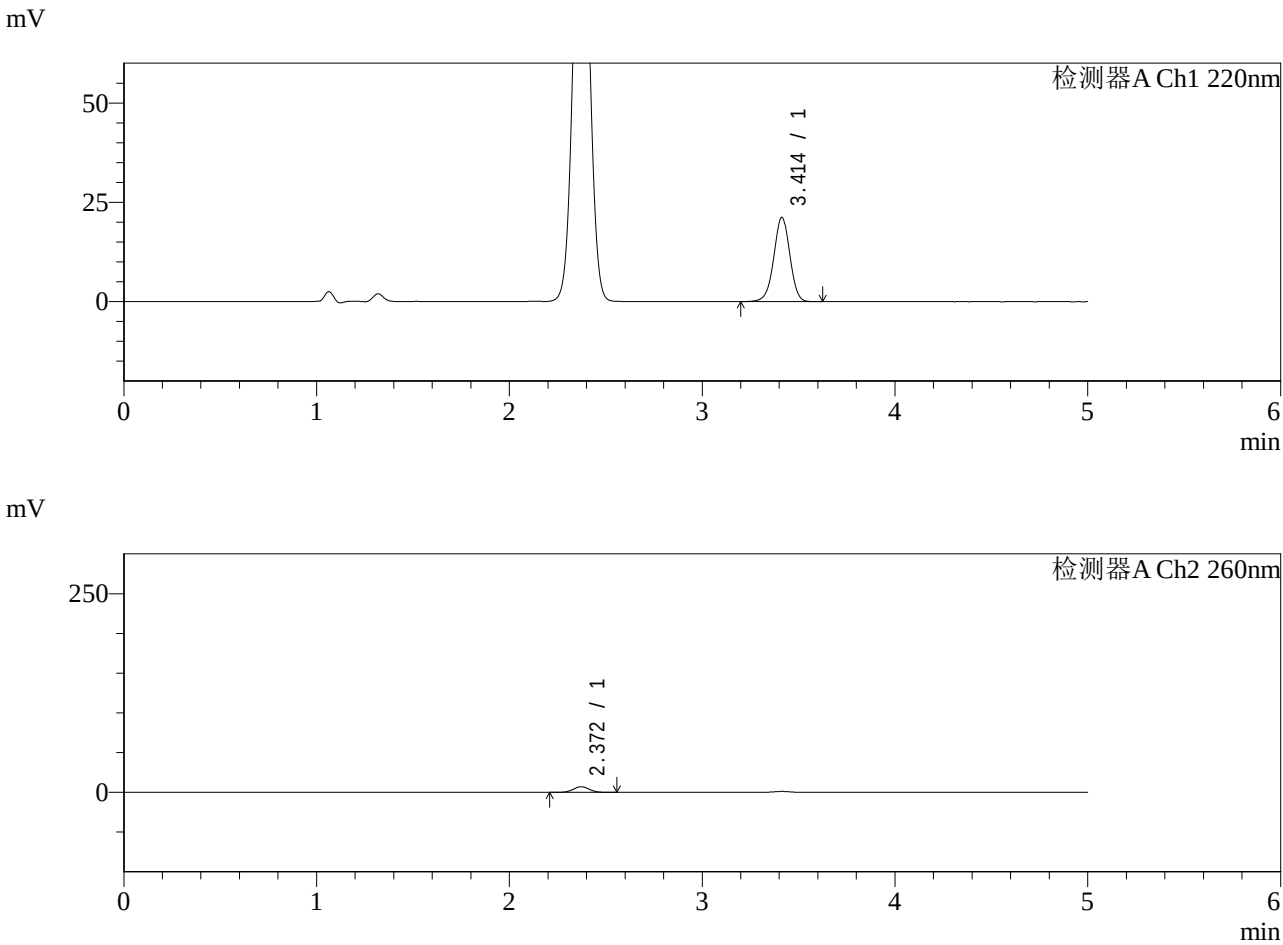

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	122175	100.000	21242	8278	0.974	--
总计		122175	100.000	21242			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	40834	100.000	7079	3894	1.023	--
总计		40834	100.000	7079			

图105 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-446-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 21:01:46
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

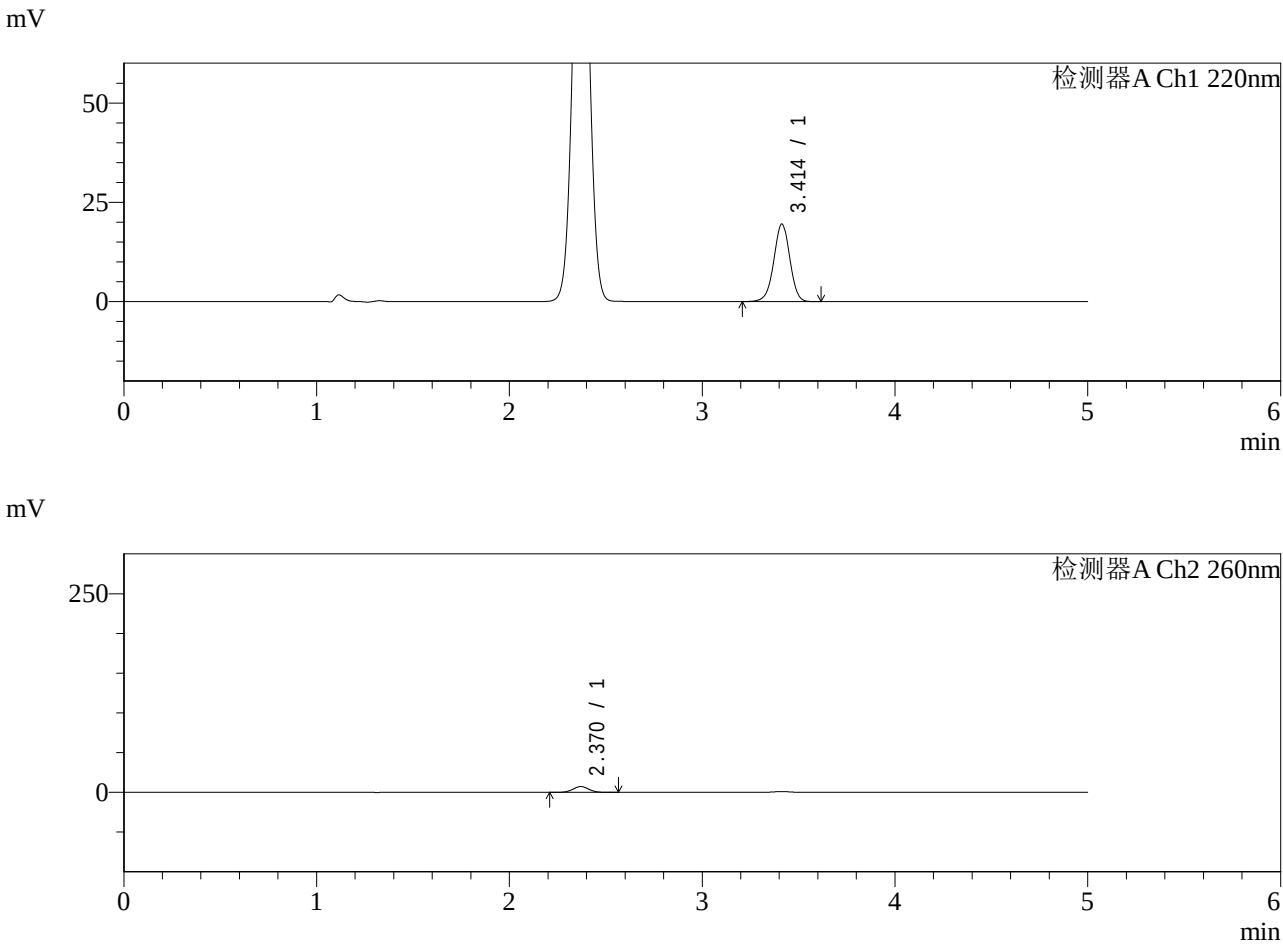

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	112159	100.000	19542	8298	0.975	--
总计		112159	100.000	19542			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	41906	100.000	7271	3899	1.028	--
总计		41906	100.000	7271			

图106 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-447-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 21:07:08
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

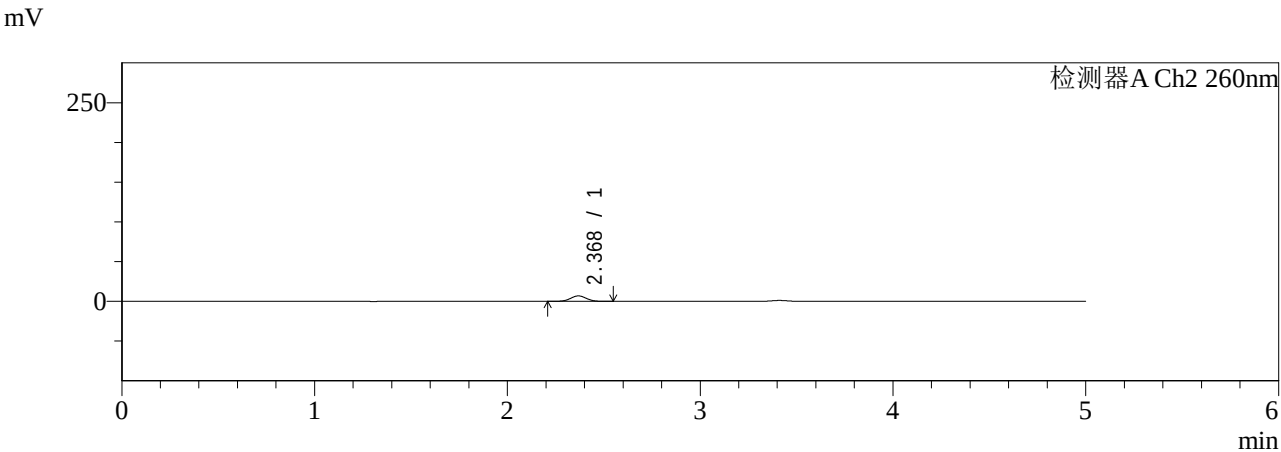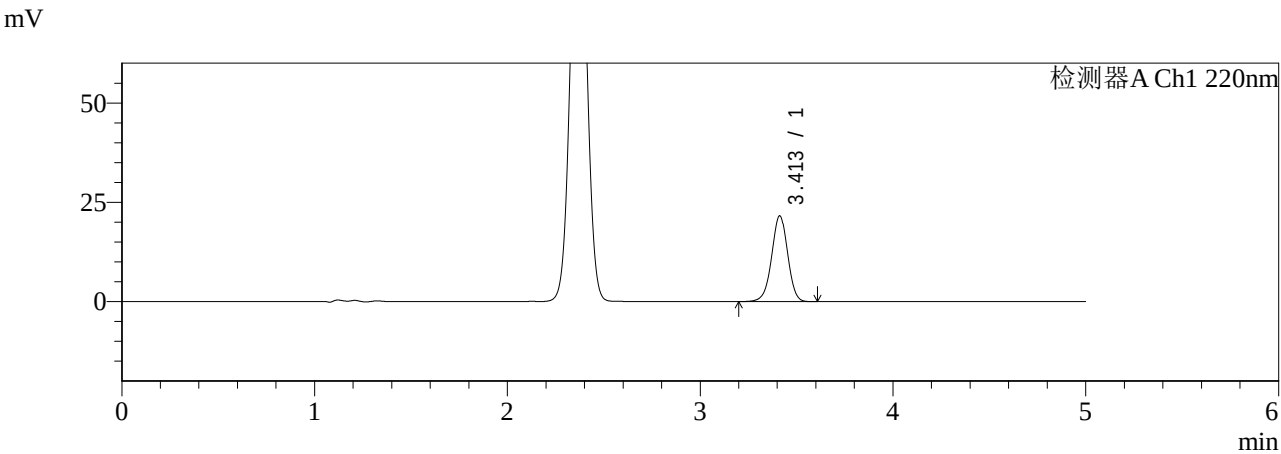

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.413	124160	100.000	21613	8295	0.974	--
总计		124160	100.000	21613			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	39531	100.000	6859	3909	1.026	--
总计		39531	100.000	6859			

图107 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-448-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 21:12:30
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

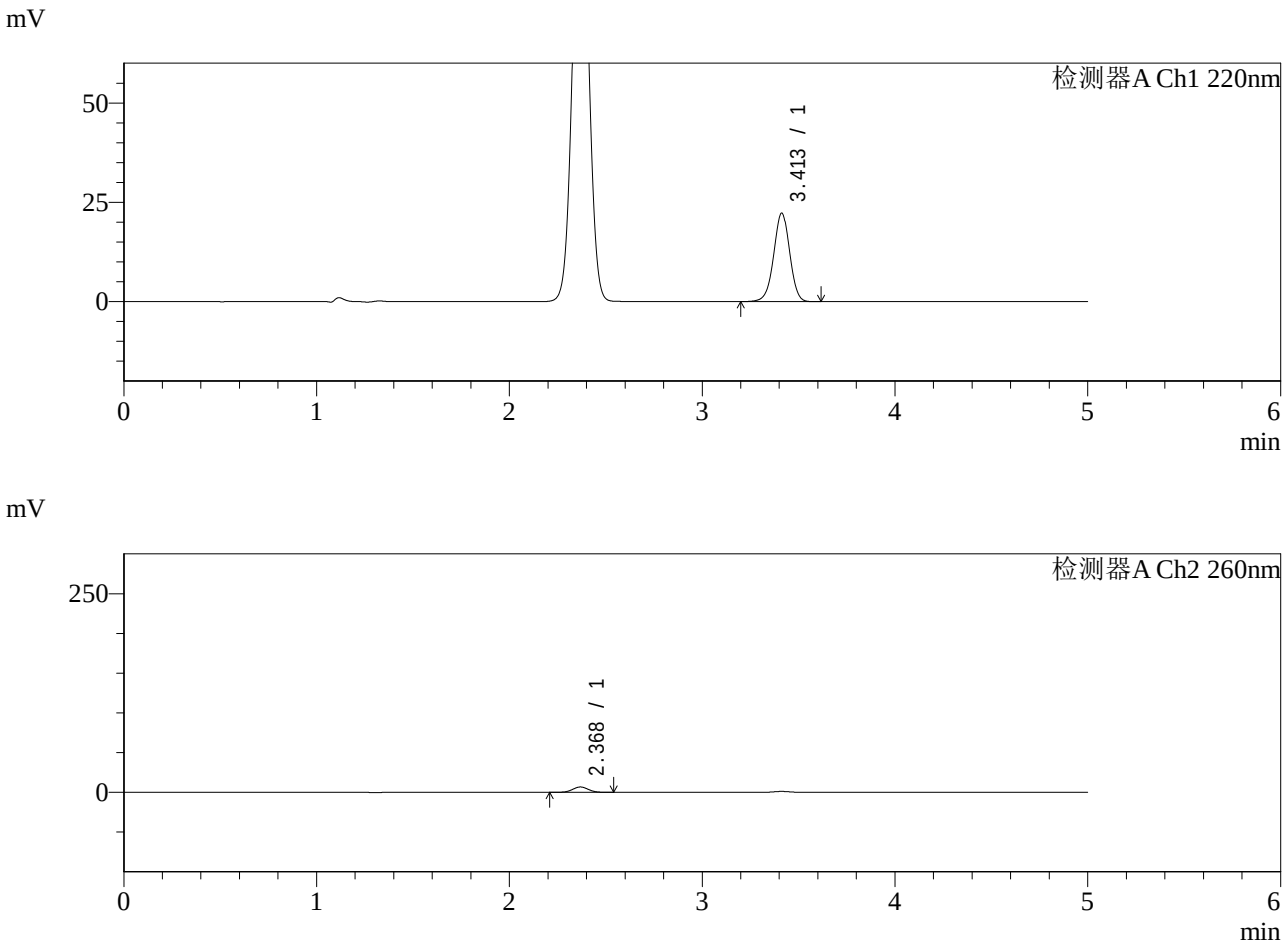

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.413	128059	100.000	22287	8293	0.976	--
总计		128059	100.000	22287			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	38730	100.000	6727	3903	1.028	--
总计		38730	100.000	6727			

图108 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-449-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 21:17:52
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

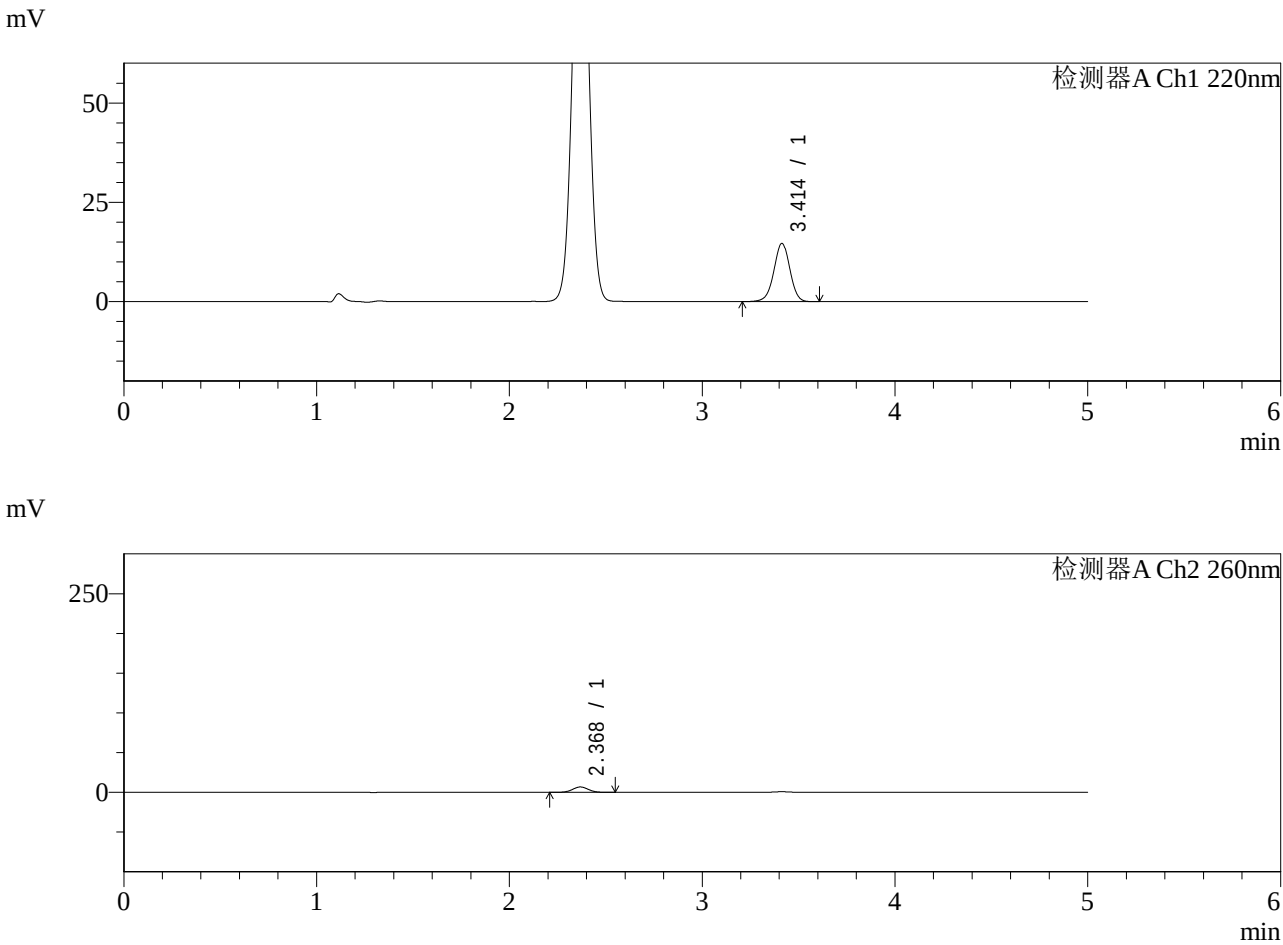

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	84215	100.000	14674	8313	0.976	--
总计		84215	100.000	14674			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	38950	100.000	6753	3908	1.025	--
总计		38950	100.000	6753			

图109 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-450-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 21:23:14
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

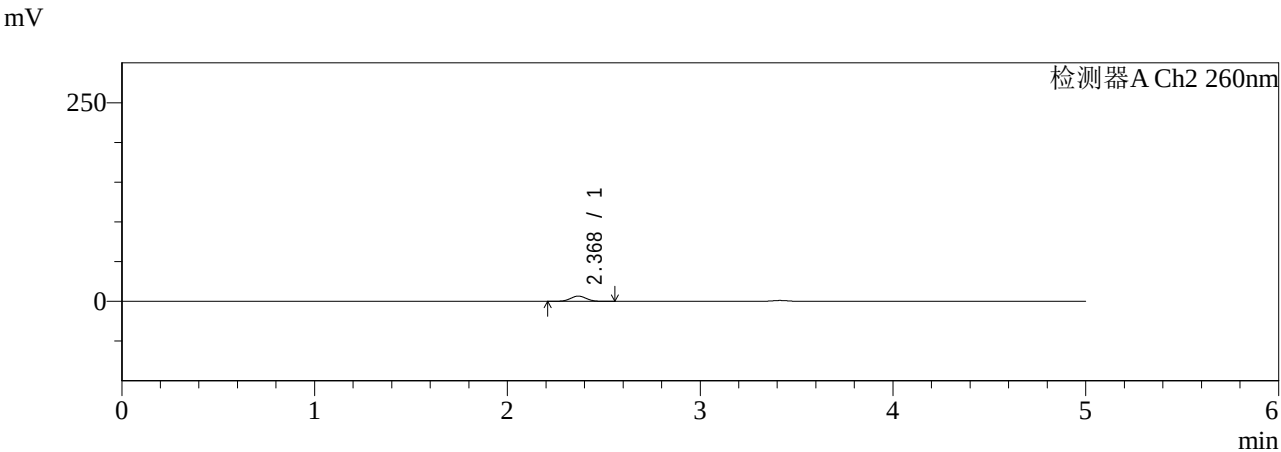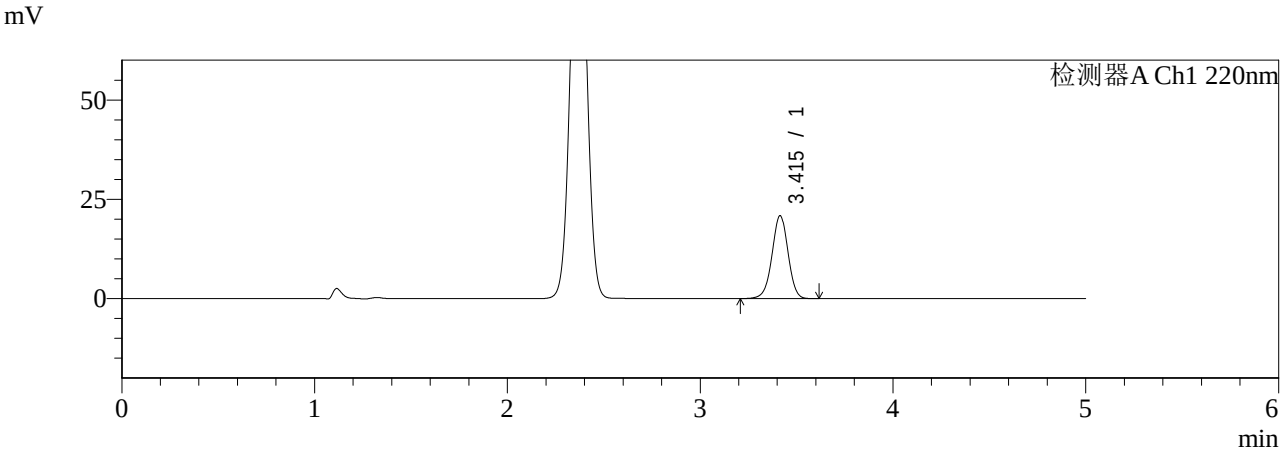

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.415	119732	100.000	20866	8320	0.977	--
总计		119732	100.000	20866			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	38288	100.000	6625	3899	1.028	--
总计		38288	100.000	6625			

图110 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-451-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 21:28:37
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

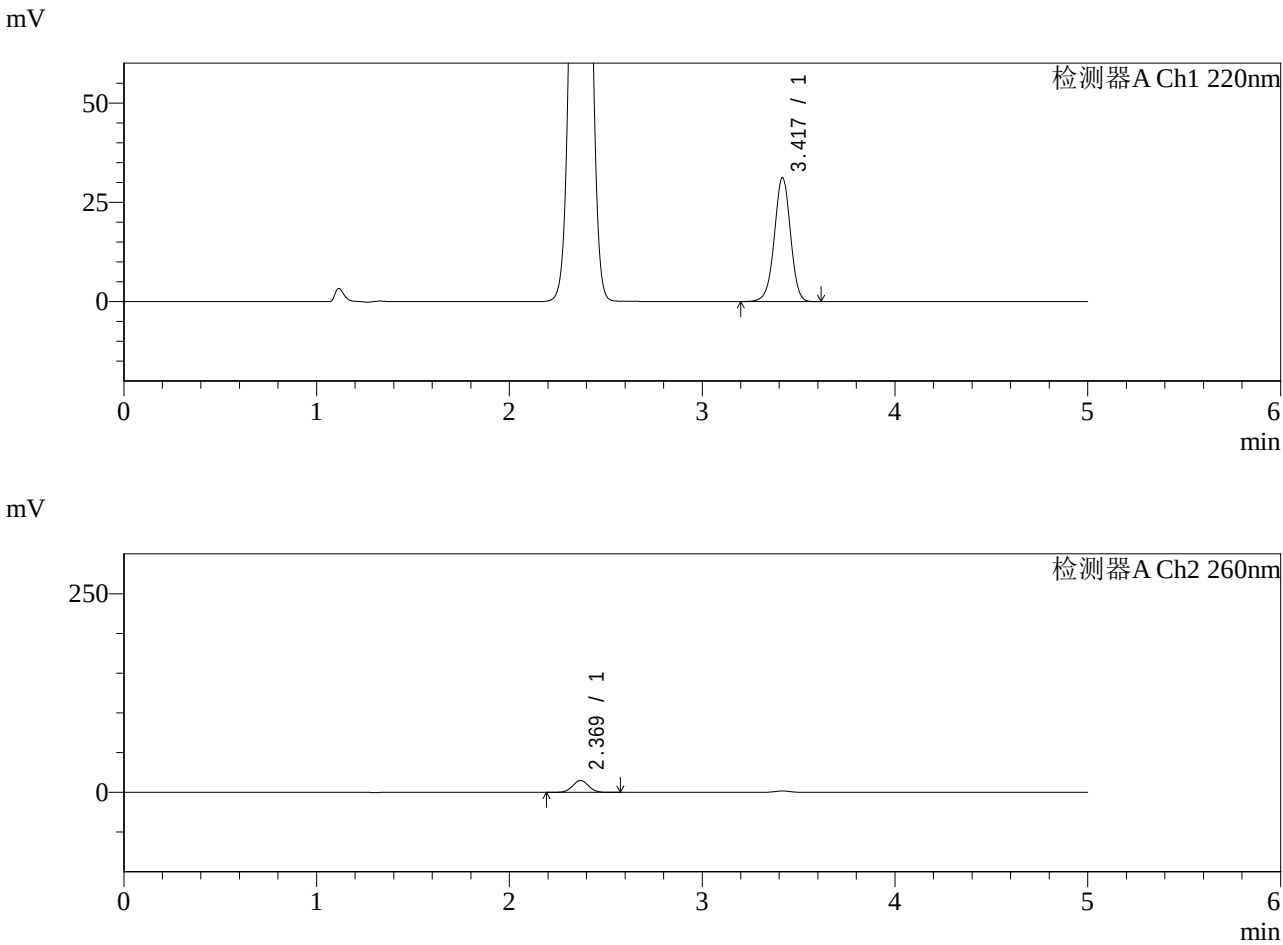

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.417	179496	100.000	31136	8322	0.977	--
总计		179496	100.000	31136			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	86602	100.000	14912	3849	1.021	--
总计		86602	100.000	14912			

图111 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-452-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 21:33:59
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

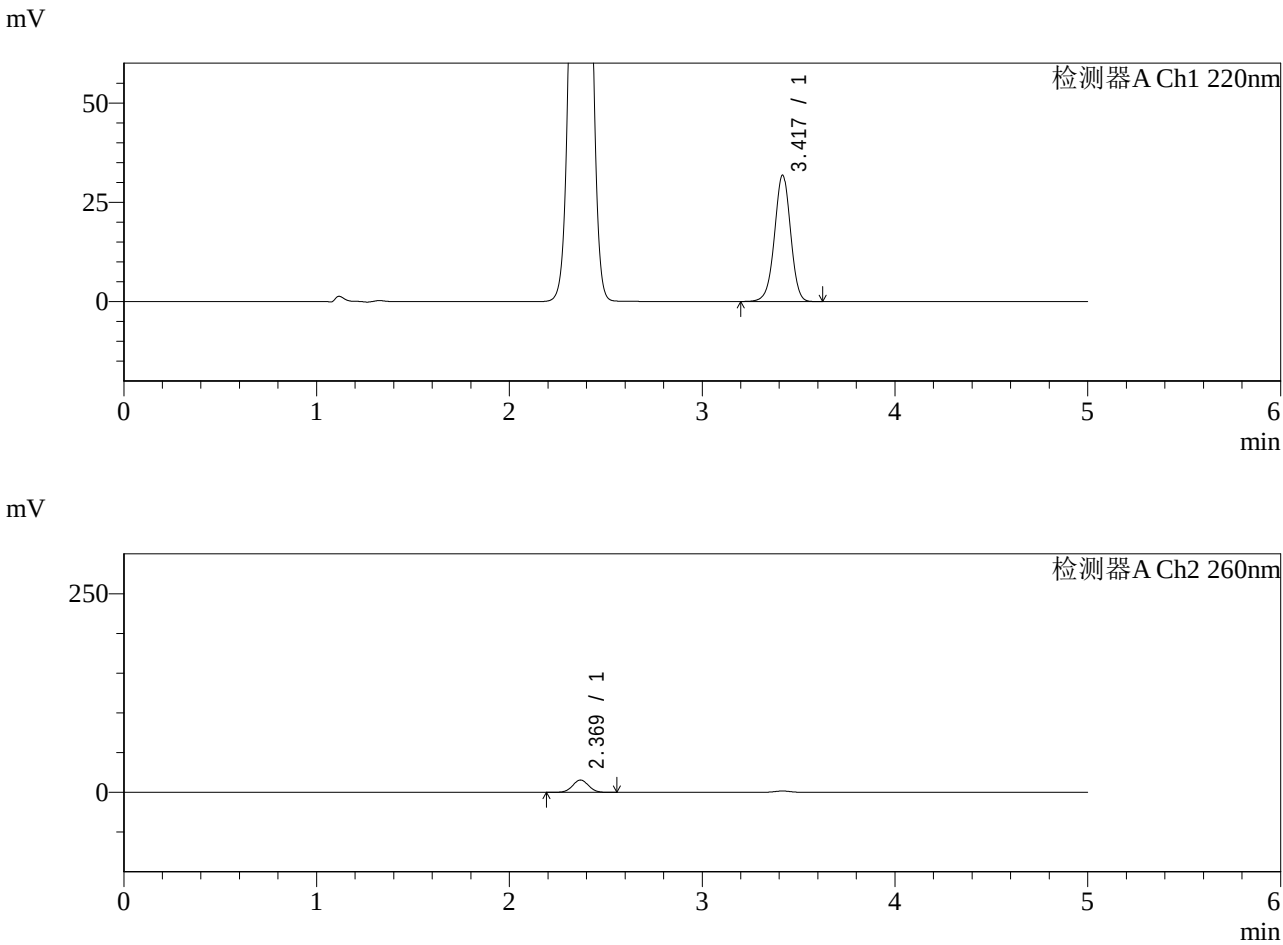

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.417	182650	100.000	31652	8332	0.977	--
总计		182650	100.000	31652			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	89926	100.000	15527	3854	1.025	--
总计		89926	100.000	15527			

图112 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-453-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 21:39:22
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

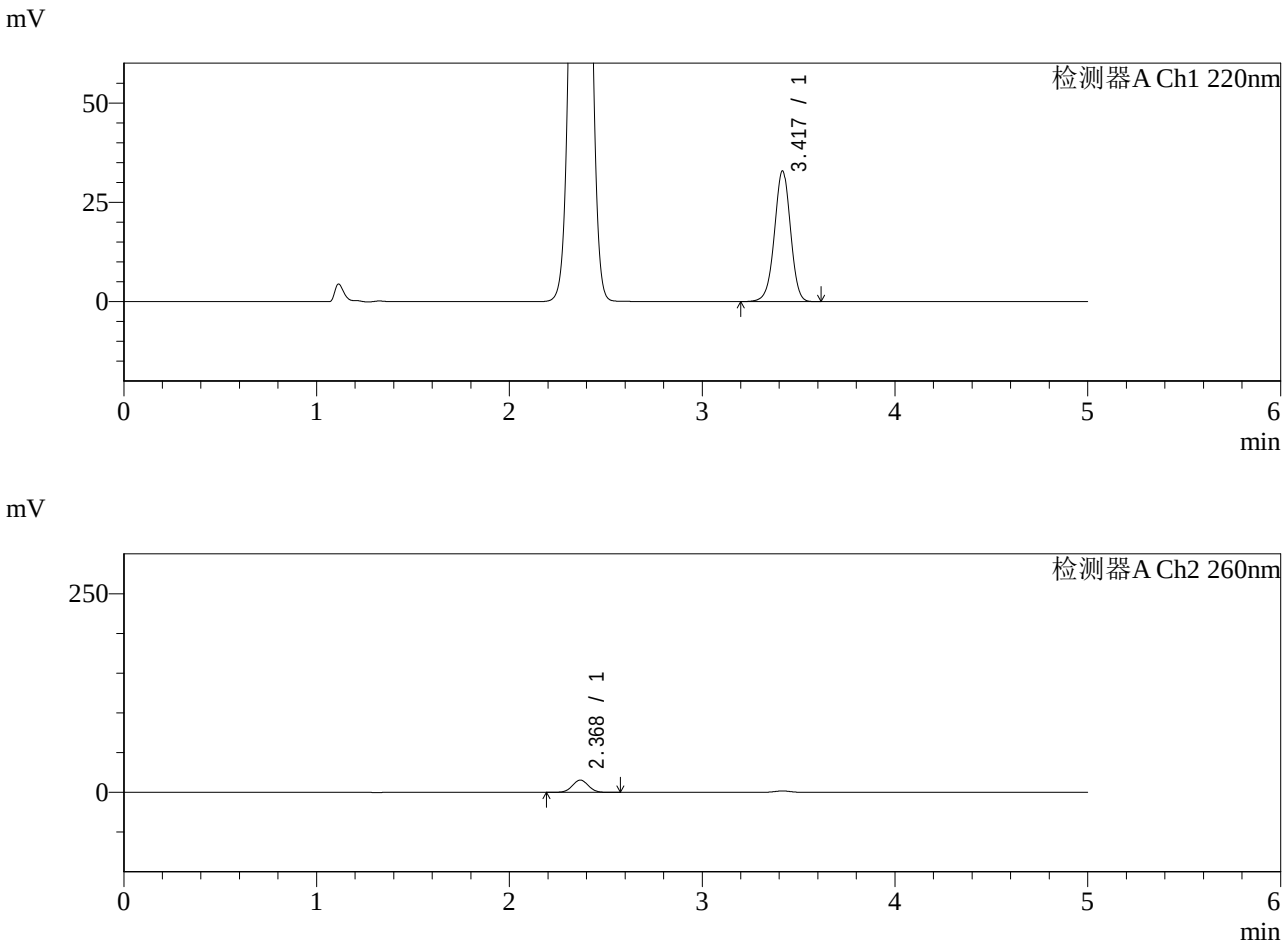

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.417	188789	100.000	32743	8312	0.977	--
总计		188789	100.000	32743			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	89527	100.000	15392	3846	1.025	--
总计		89527	100.000	15392			

图113 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-454-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 21:44:44
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

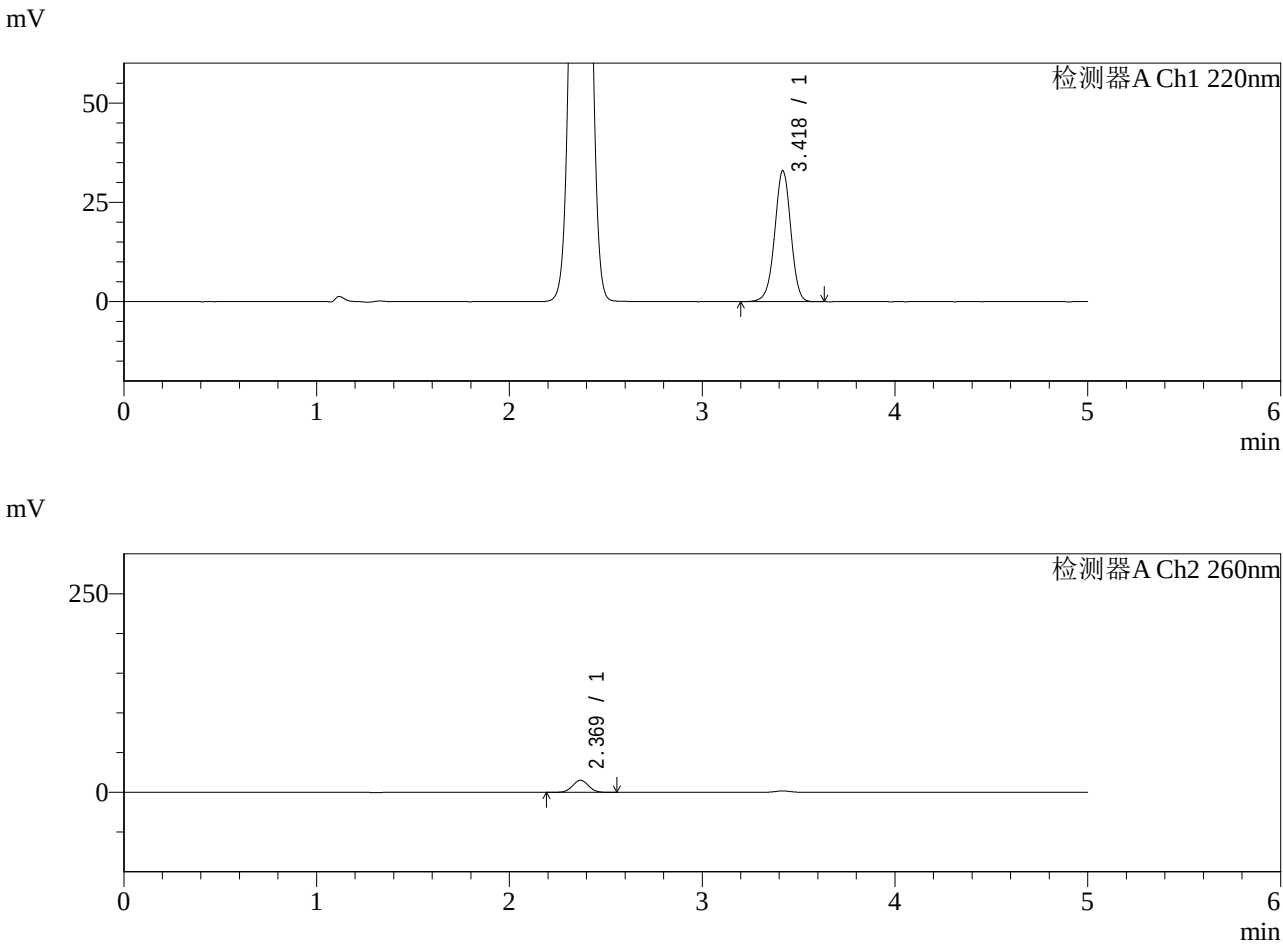

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.418	189447	100.000	32878	8338	0.976	--
总计		189447	100.000	32878			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	88048	100.000	15180	3858	1.023	--
总计		88048	100.000	15180			

图114 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-455-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 21:50:06
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

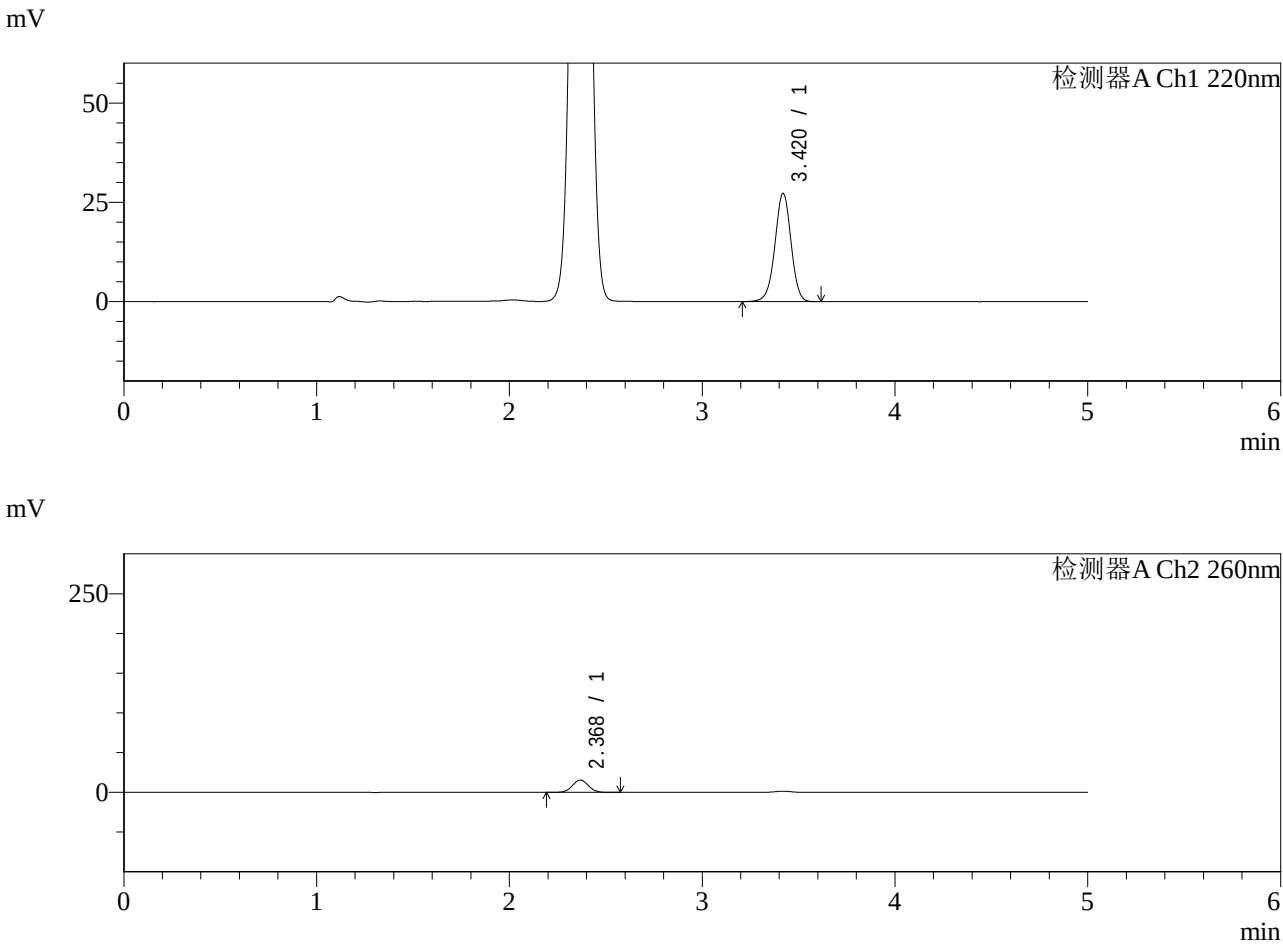

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.420	156322	100.000	27227	8340	0.977	--
总计		156322	100.000	27227			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	89596	100.000	15438	3853	1.025	--
总计		89596	100.000	15438			

图115 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-456-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 21:55:28
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

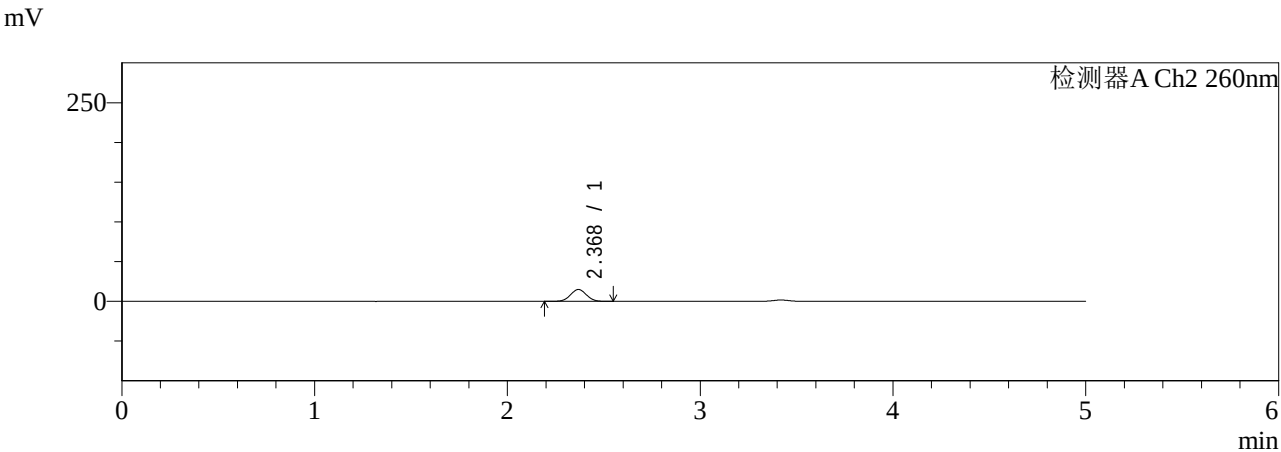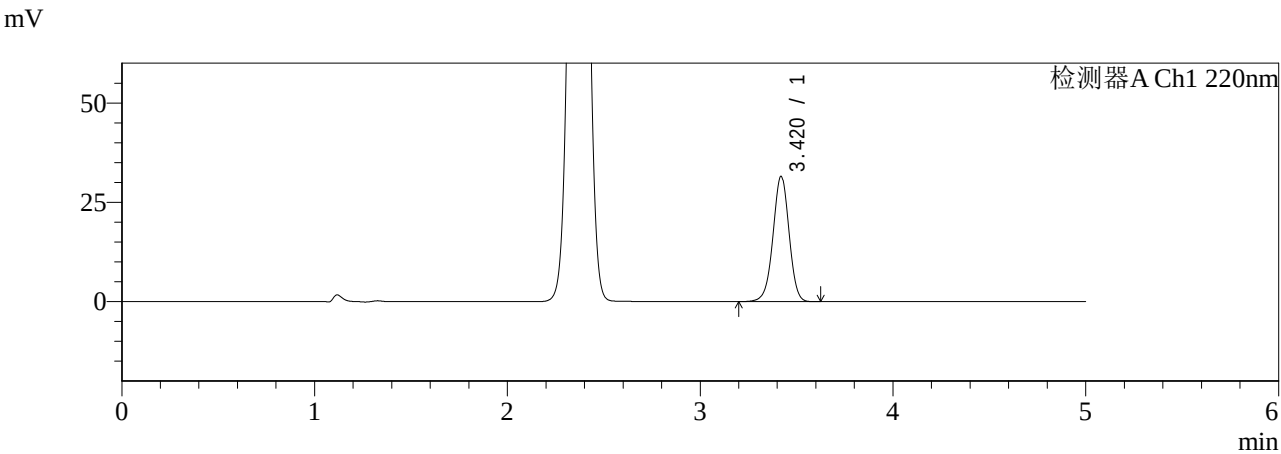

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.420	181019	100.000	31508	8335	0.978	--
总计		181019	100.000	31508			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	86202	100.000	14863	3852	1.023	--
总计		86202	100.000	14863			

图116 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-457-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 22:00:50
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

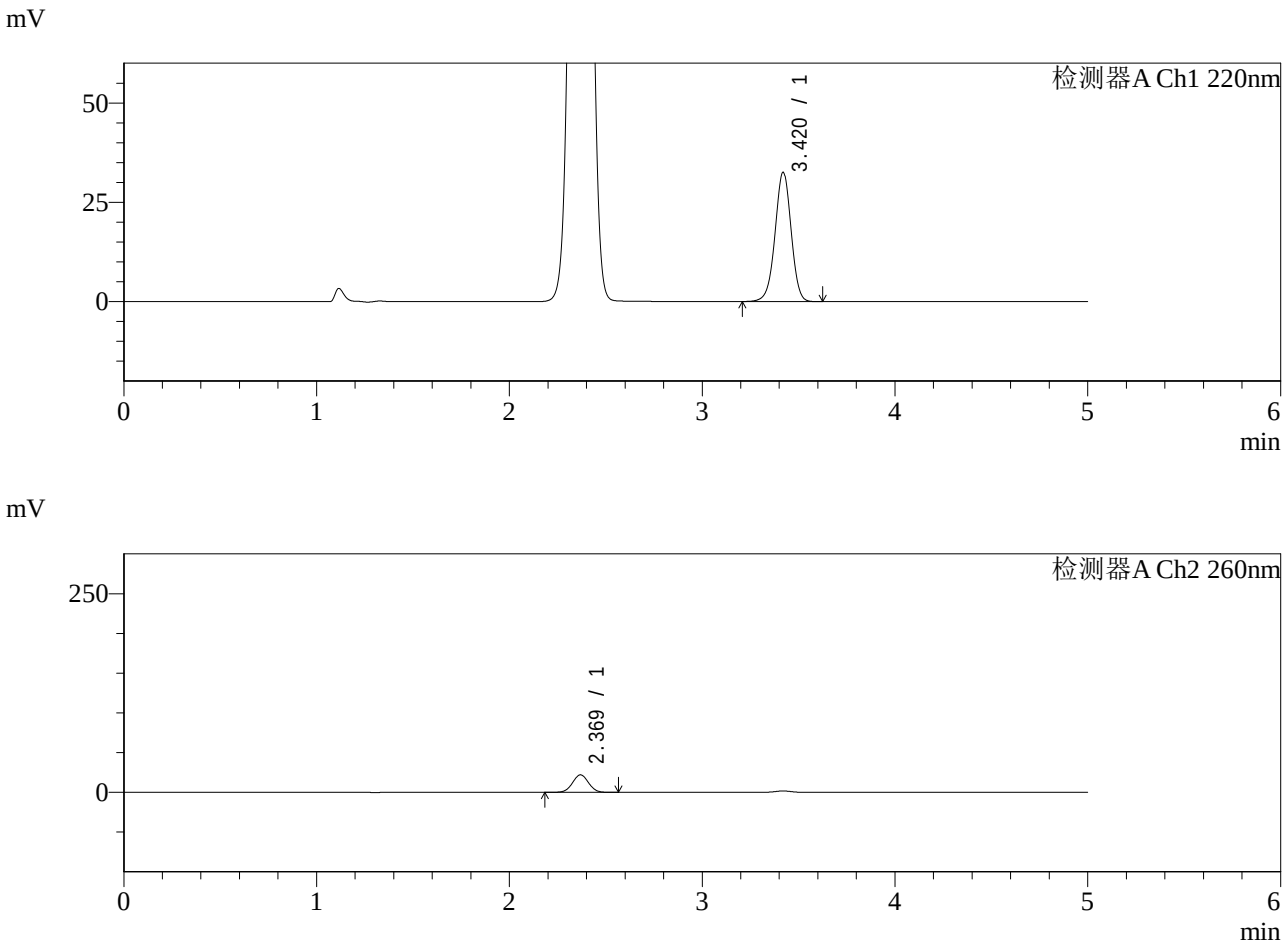

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.420	186699	100.000	32526	8344	0.977	--
总计		186699	100.000	32526			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	127920	100.000	21975	3826	1.021	--
总计		127920	100.000	21975			

图117 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-458-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 22:06:12
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:19:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

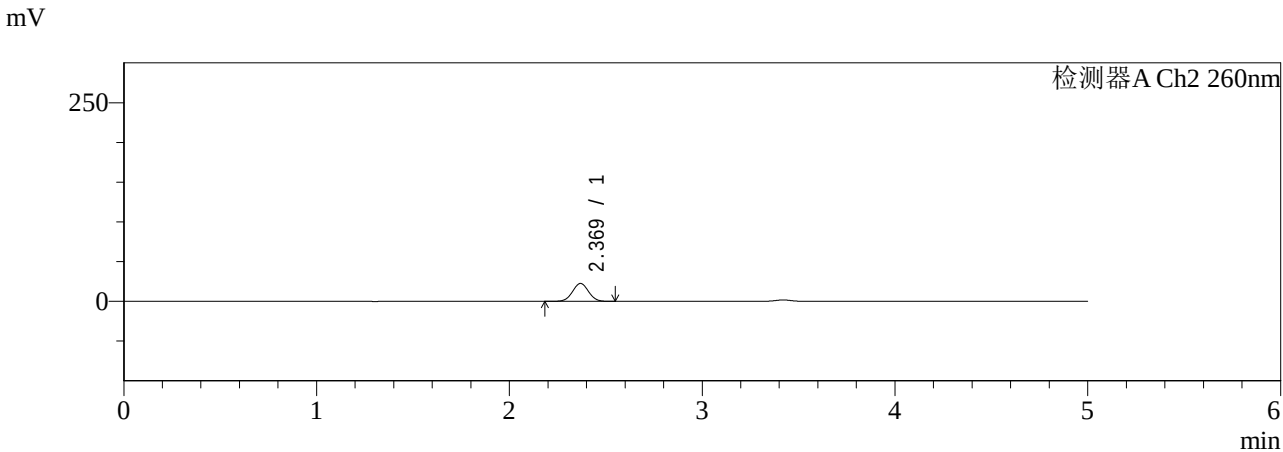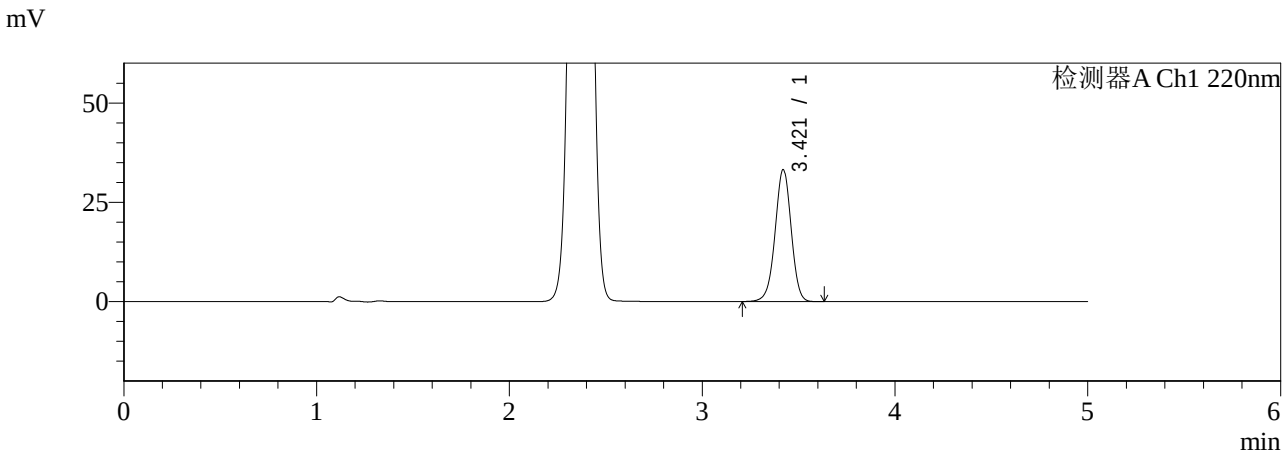

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.421	190537	100.000	33209	8346	0.977	--
总计		190537	100.000	33209			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	130786	100.000	22473	3824	1.022	--
总计		130786	100.000	22473			

图118 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-459-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 22:11:35
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

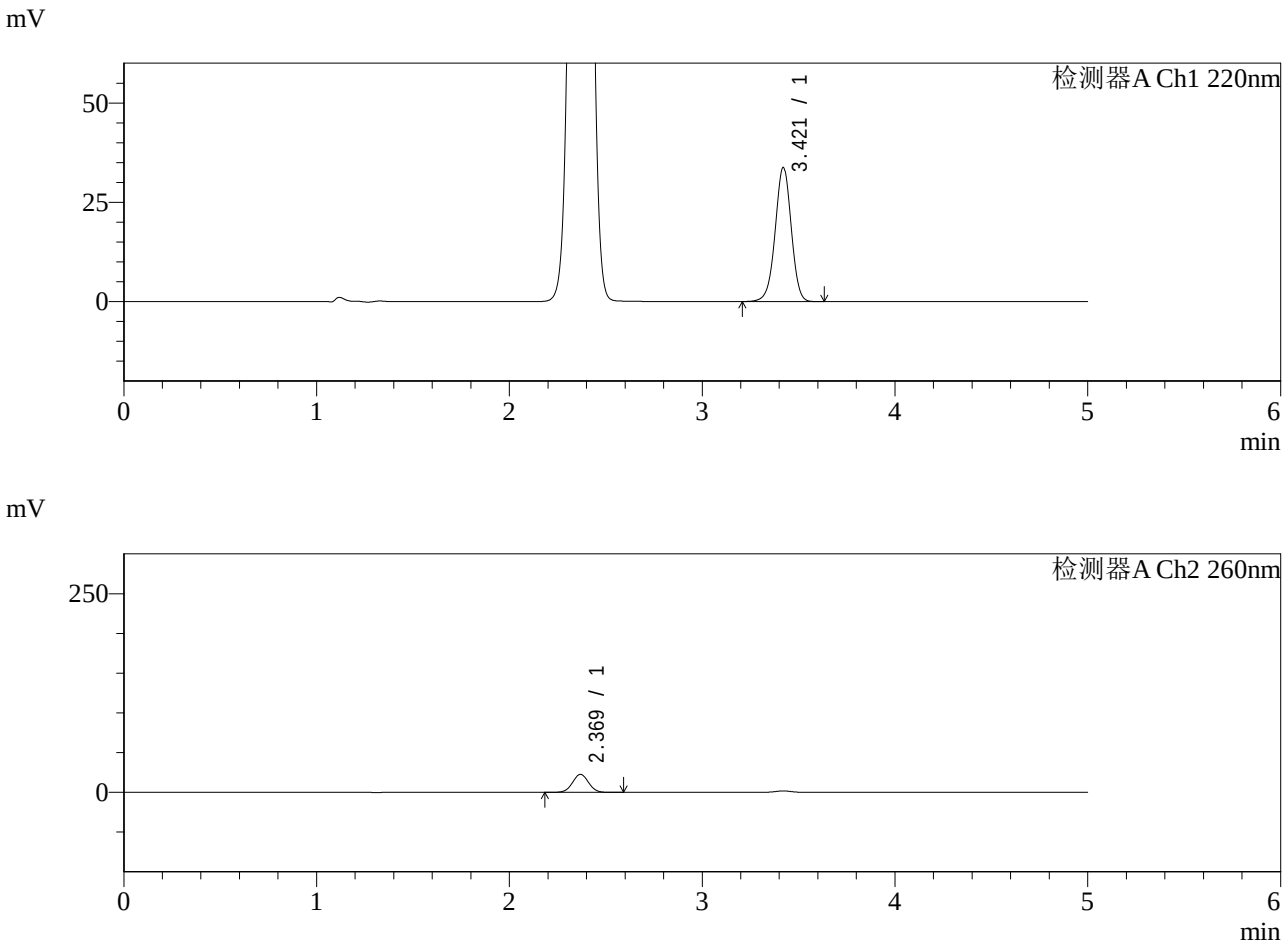

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.421	193750	100.000	33770	8342	0.977	--
总计		193750	100.000	33770			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	131595	100.000	22585	3817	1.021	--
总计		131595	100.000	22585			

图119 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-460-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 22:16:58
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

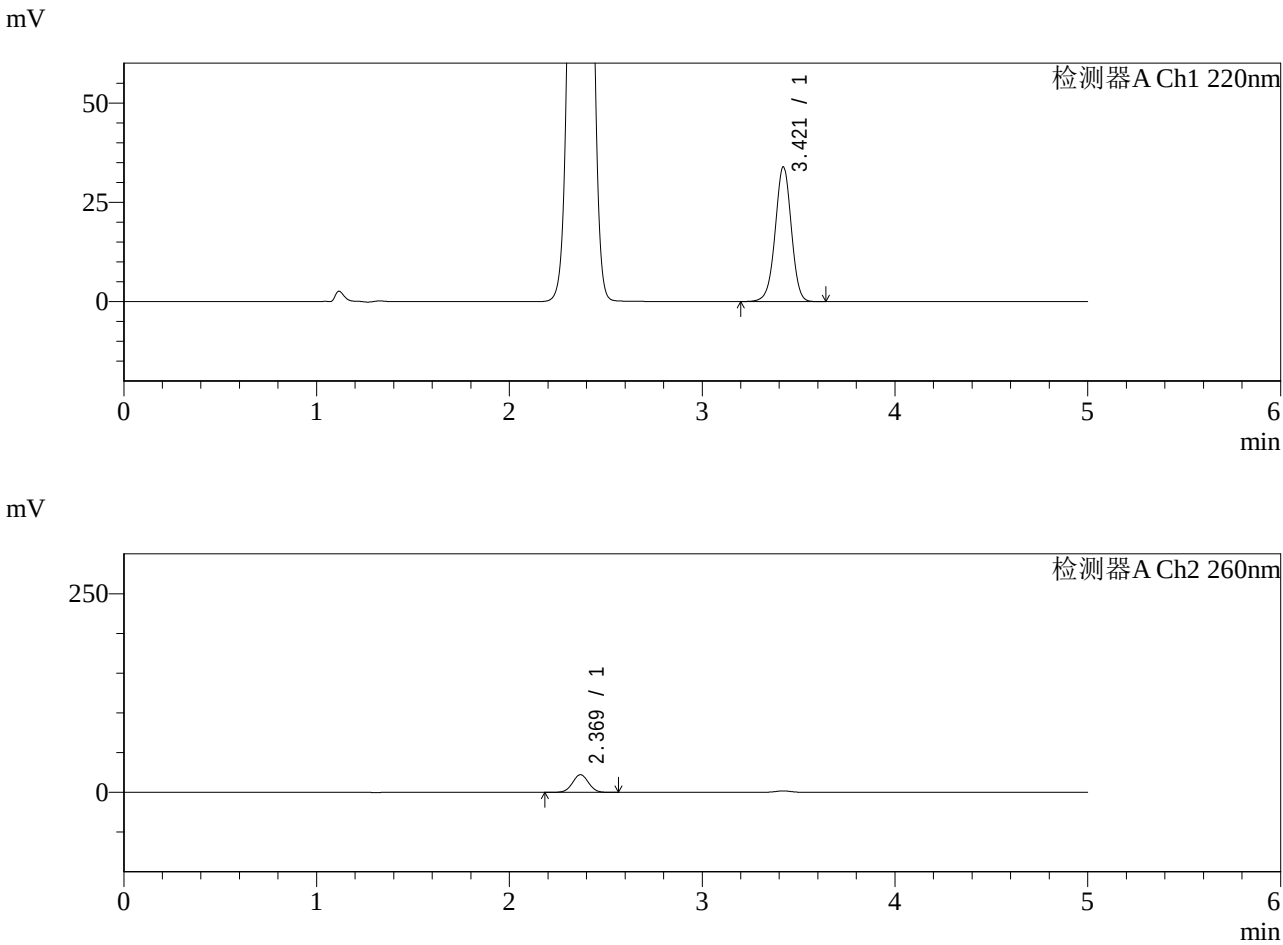

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.421	194593	100.000	33902	8345	0.978	--
总计		194593	100.000	33902			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	128690	100.000	22121	3825	1.021	--
总计		128690	100.000	22121			

图120 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-461-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 22:22:20
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

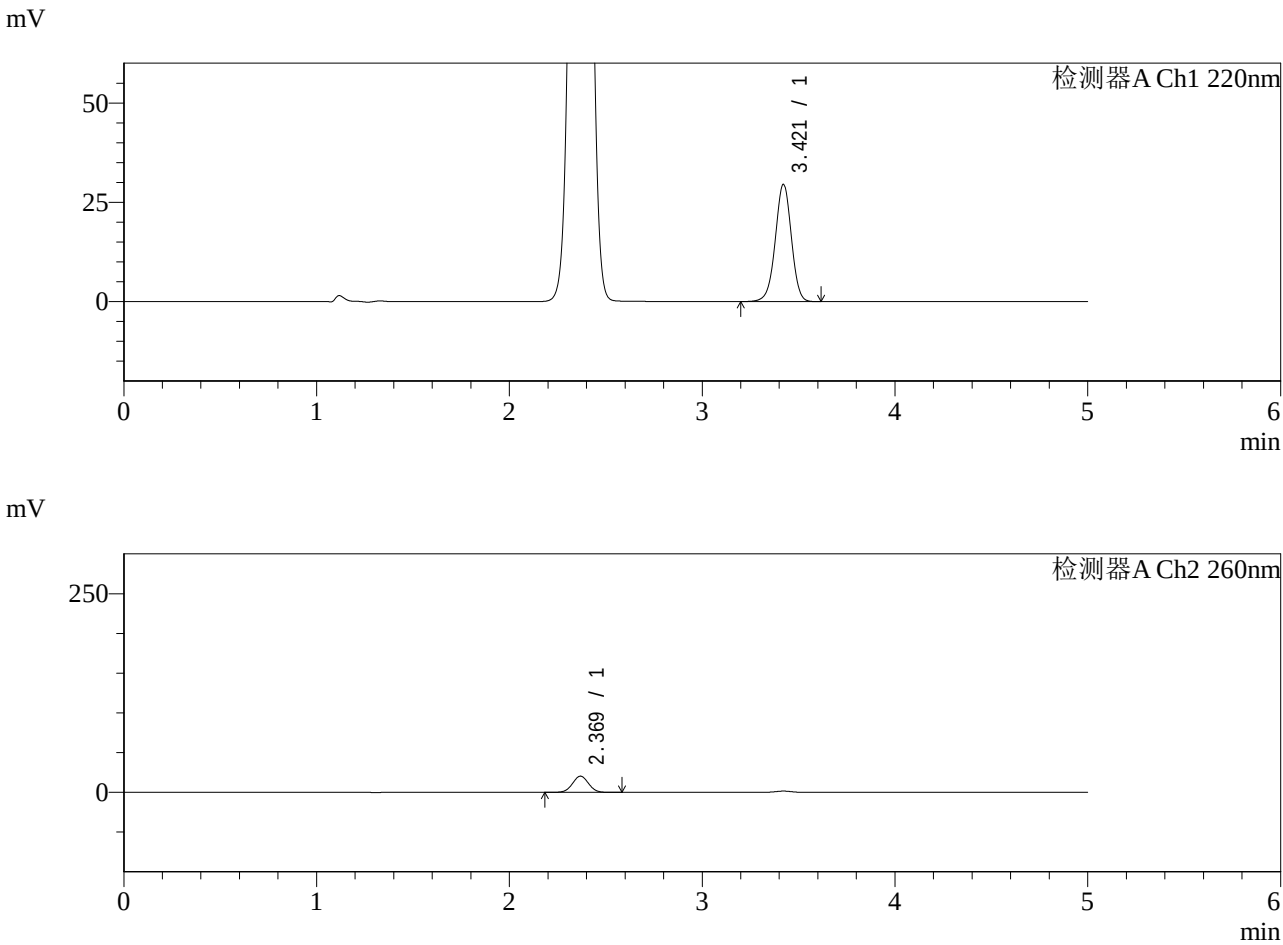

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.421	169376	100.000	29521	8354	0.977	--
总计		169376	100.000	29521			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	118481	100.000	20356	3825	1.023	--
总计		118481	100.000	20356			

图121 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-462-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 22:27:41
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

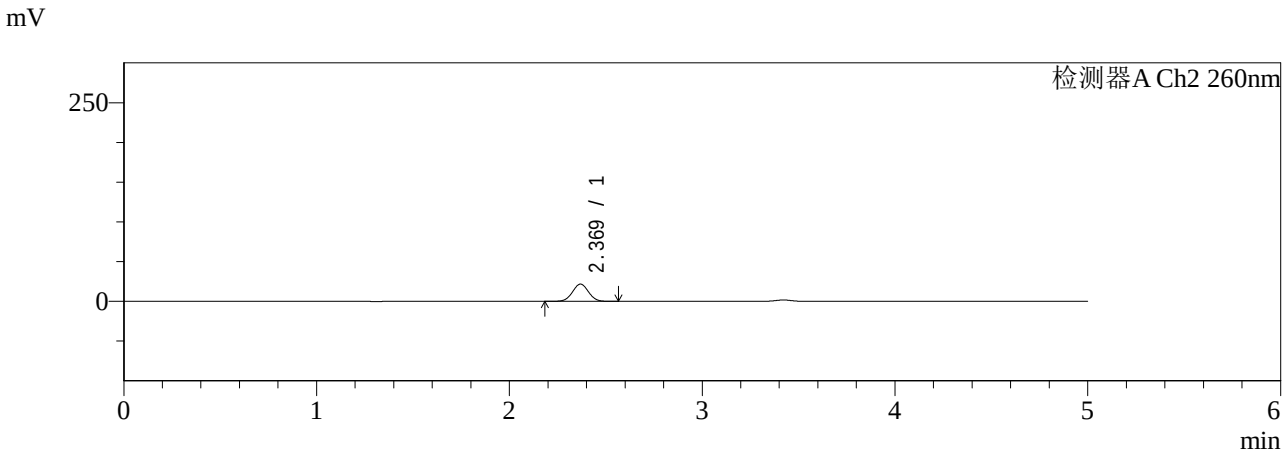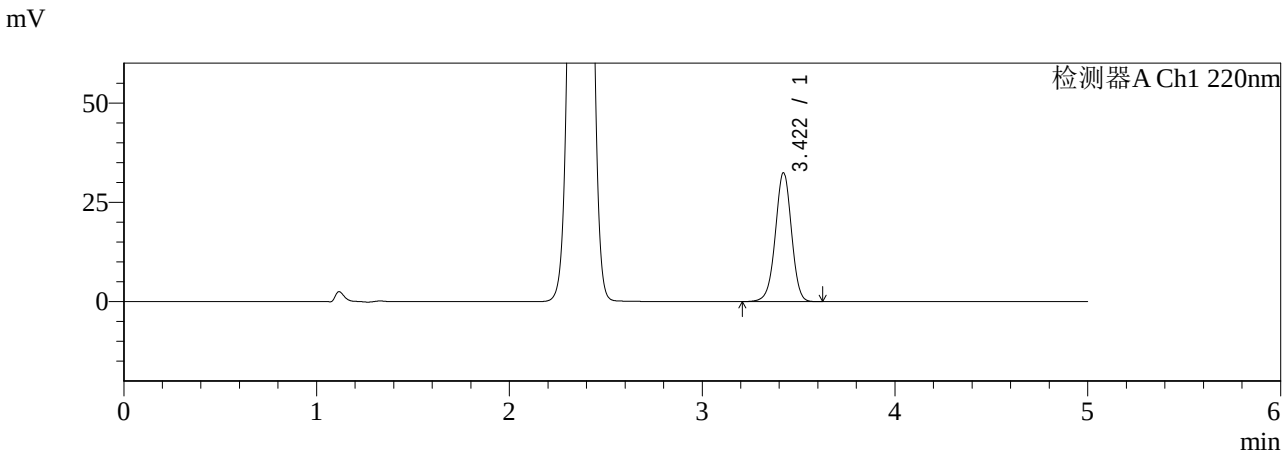

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.422	186173	100.000	32444	8345	0.978	--
总计		186173	100.000	32444			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	126178	100.000	21652	3825	1.022	--
总计		126178	100.000	21652			

图122 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-463-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 22:33:03
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

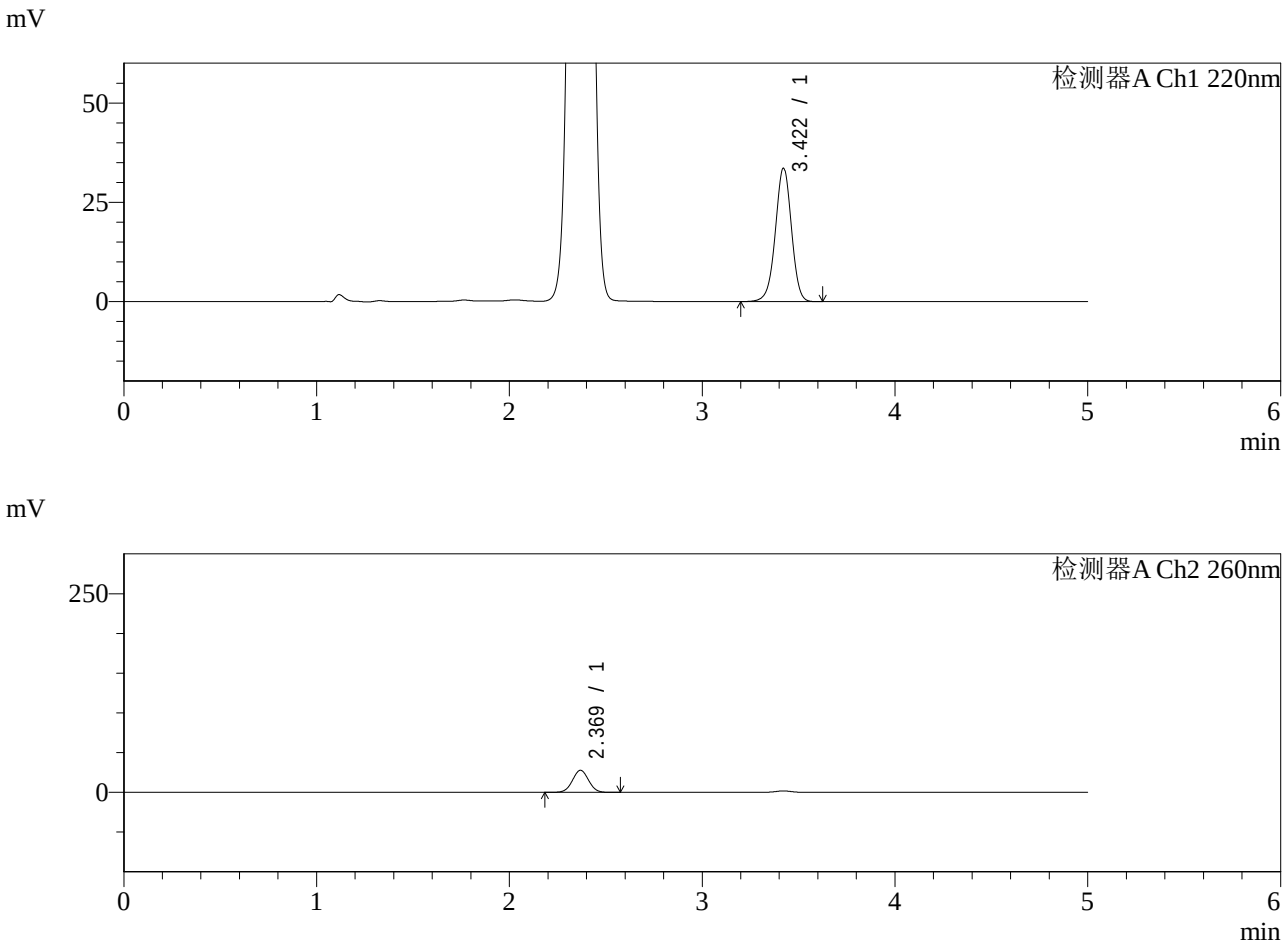

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.422	192889	100.000	33602	8349	0.977	--
总计		192889	100.000	33602			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	161950	100.000	27729	3800	1.018	--
总计		161950	100.000	27729			

图123 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-464-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 22:38:24
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

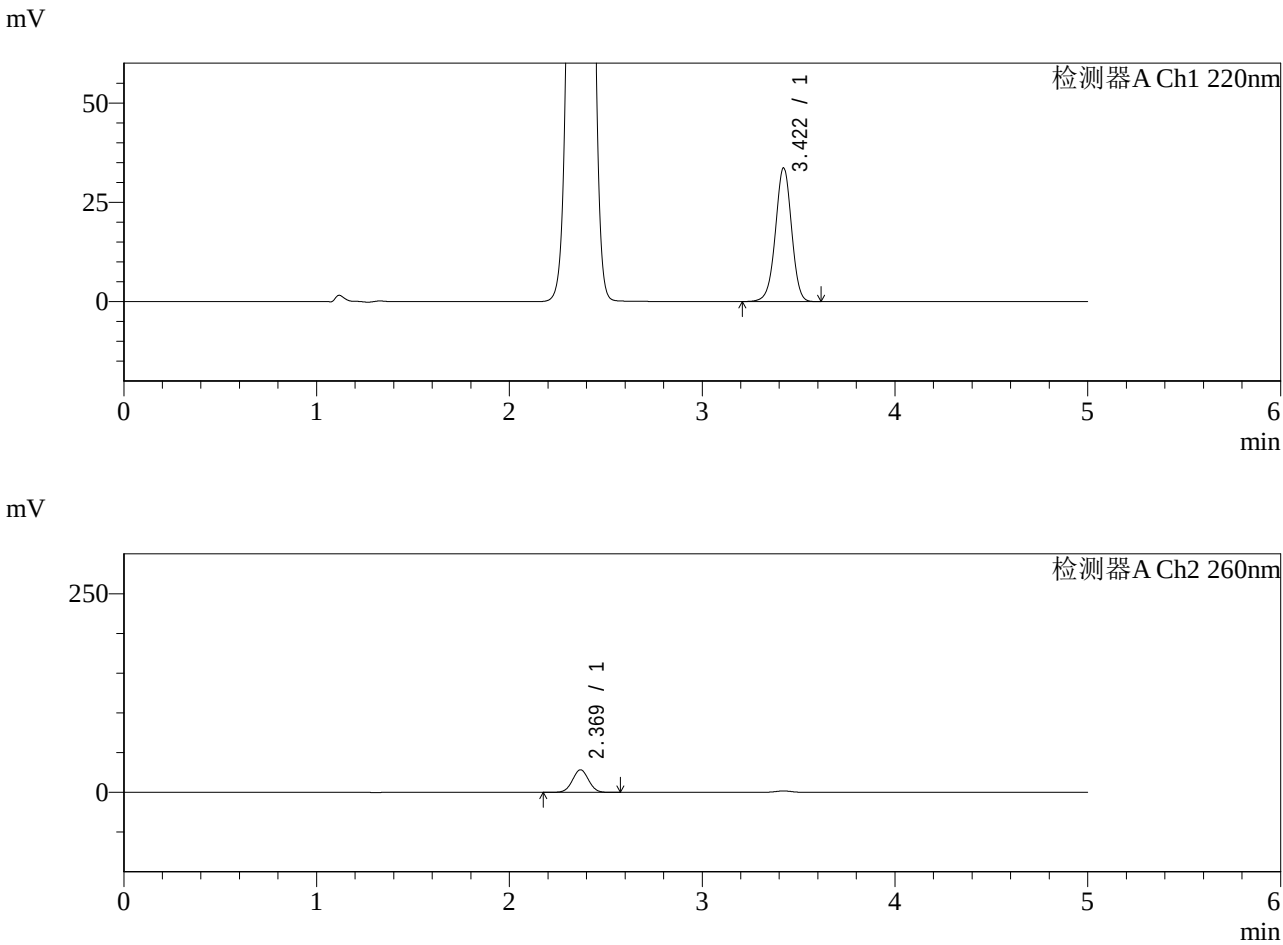

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.422	193040	100.000	33657	8336	0.978	--
总计		193040	100.000	33657			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	165665	100.000	28359	3789	1.020	--
总计		165665	100.000	28359			

图124 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-465-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 22:43:46
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

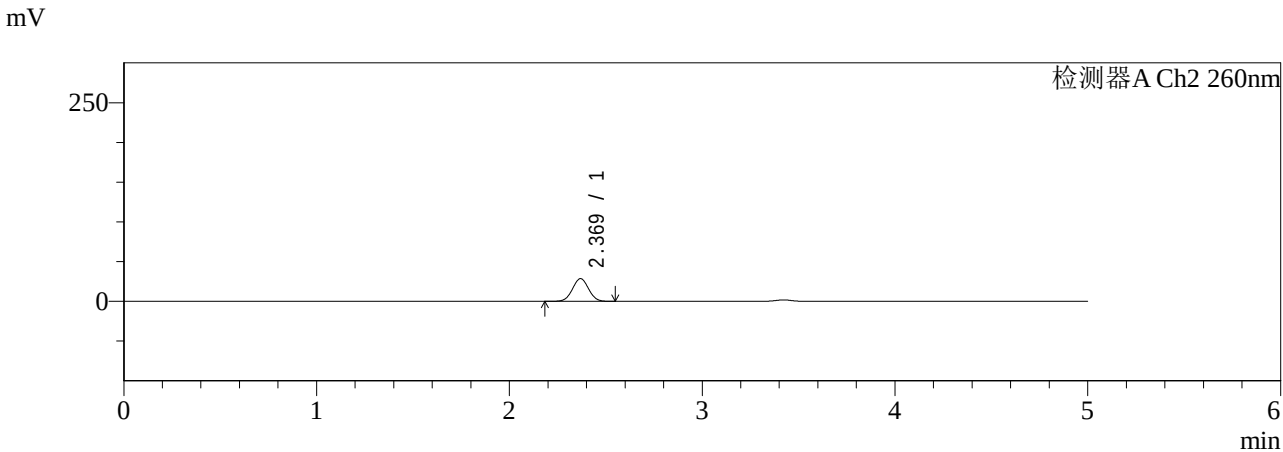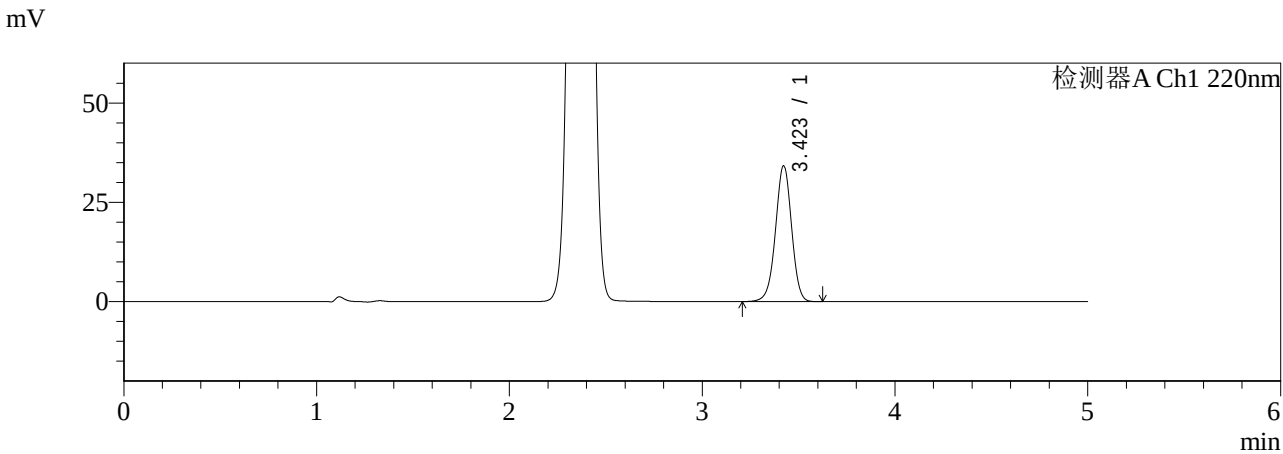

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.423	195999	100.000	34172	8359	0.978	--
总计		195999	100.000	34172			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	166480	100.000	28536	3799	1.019	--
总计		166480	100.000	28536			

图125 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-466-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 22:49:08
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

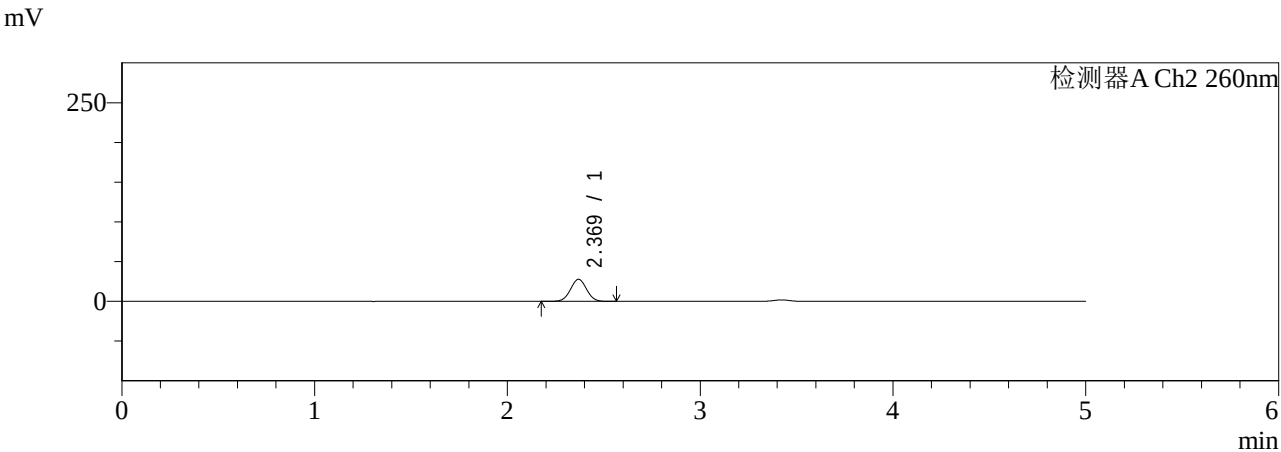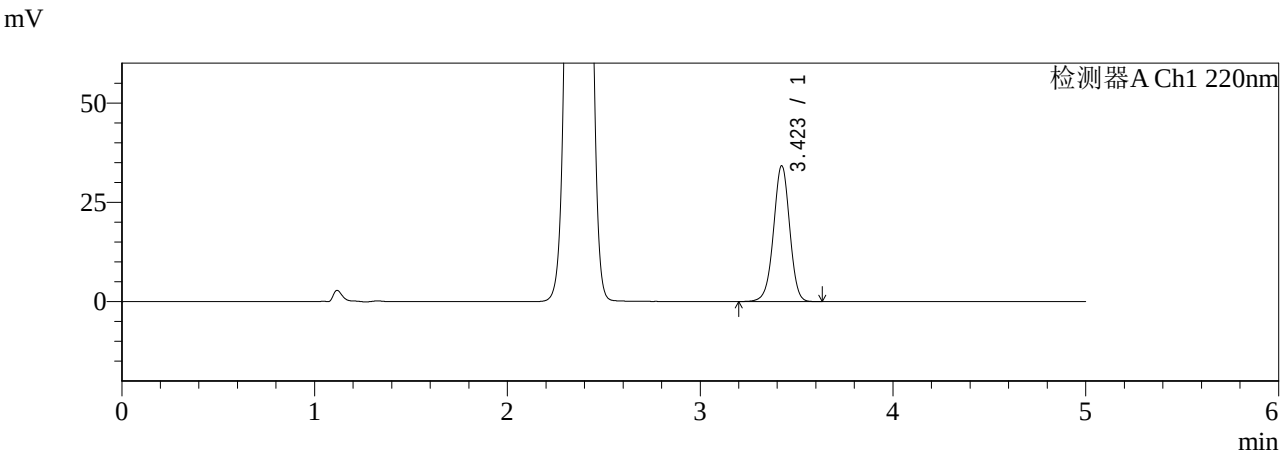

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.423	196239	100.000	34182	8357	0.978	--
总计		196239	100.000	34182			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	161869	100.000	27699	3791	1.020	--
总计		161869	100.000	27699			

图126 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-467-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 22:54:29
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

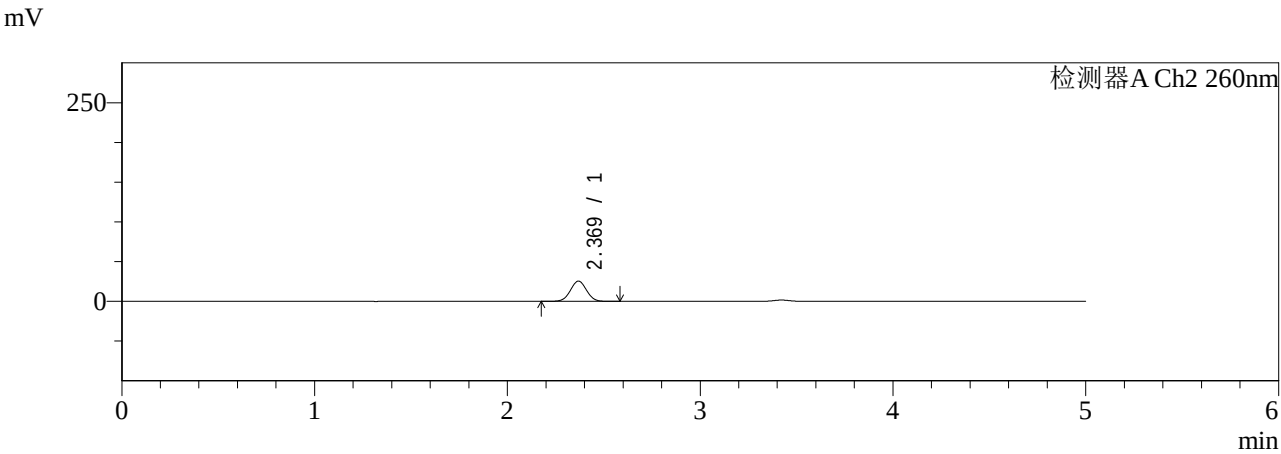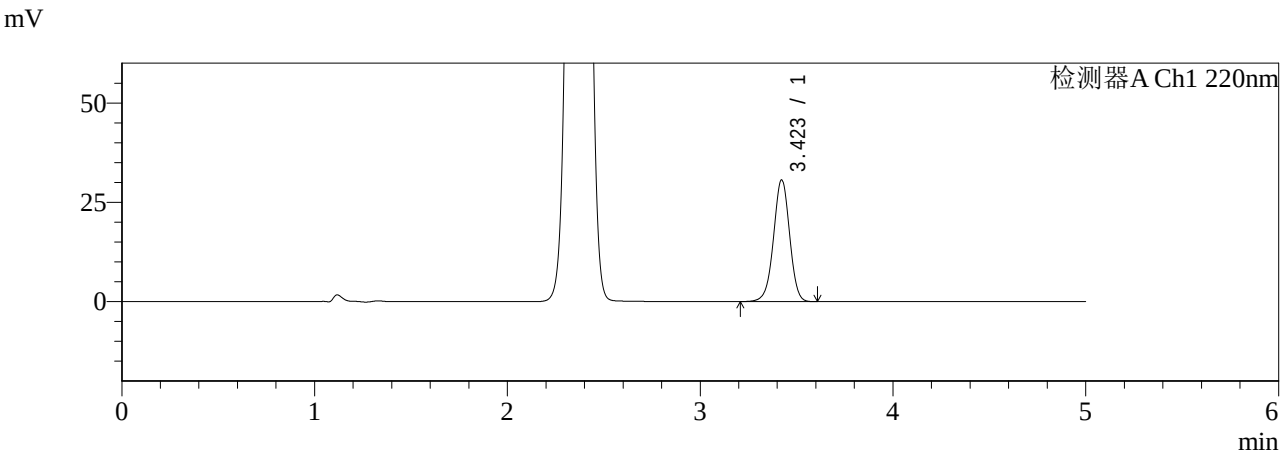

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.423	175623	100.000	30616	8360	0.979	--
总计		175623	100.000	30616			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	148533	100.000	25434	3807	1.020	--
总计		148533	100.000	25434			

图127 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-468-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 22:59:51
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

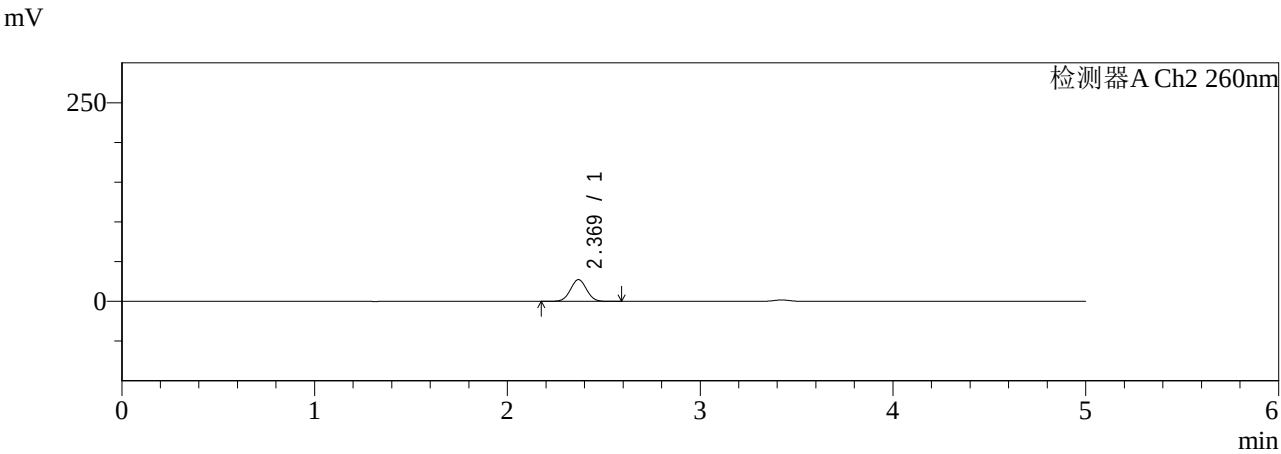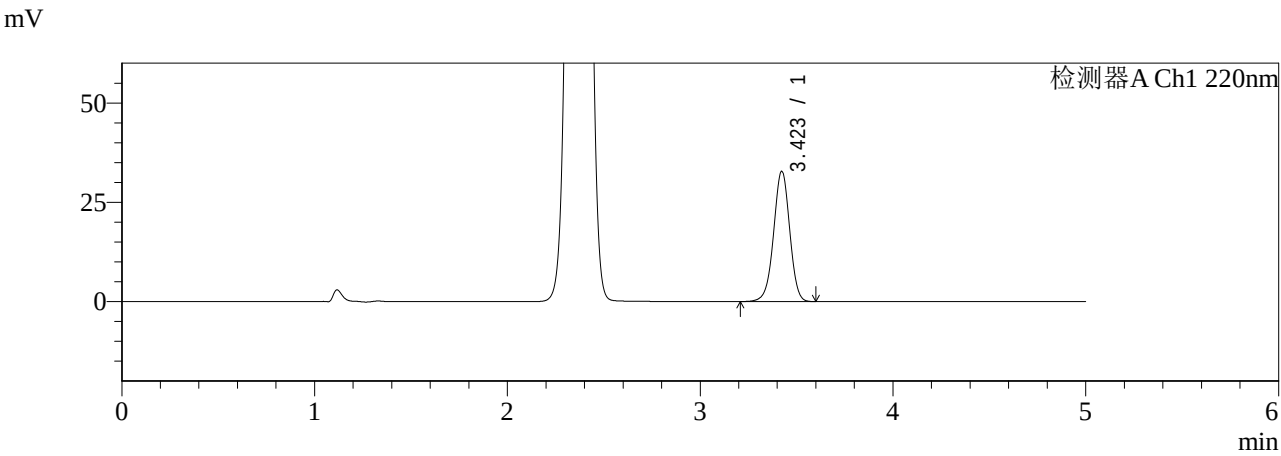

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.423	187935	100.000	32766	8372	0.978	--
总计		187935	100.000	32766			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	159327	100.000	27274	3796	1.019	--
总计		159327	100.000	27274			

图128 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-469-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 23:05:12
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

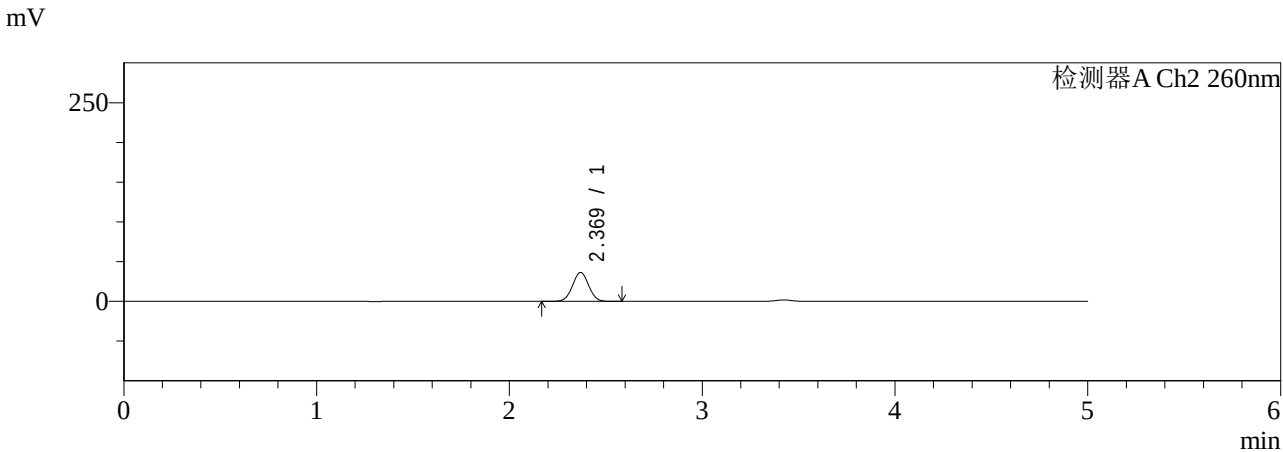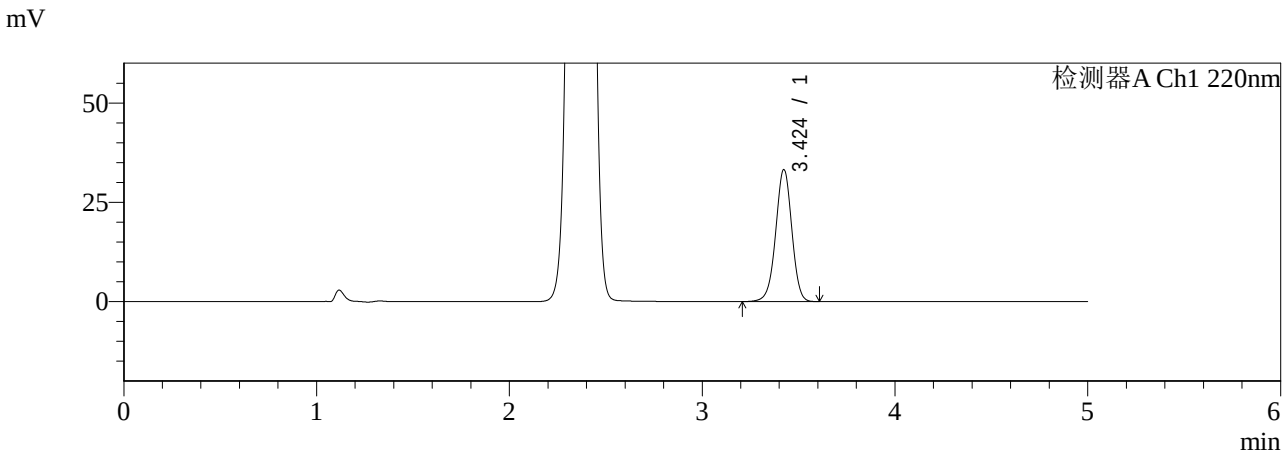

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.424	190426	100.000	33168	8361	0.978	--
总计		190426	100.000	33168			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	212967	100.000	36354	3765	1.017	--
总计		212967	100.000	36354			

图129 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-470-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 23:10:35
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

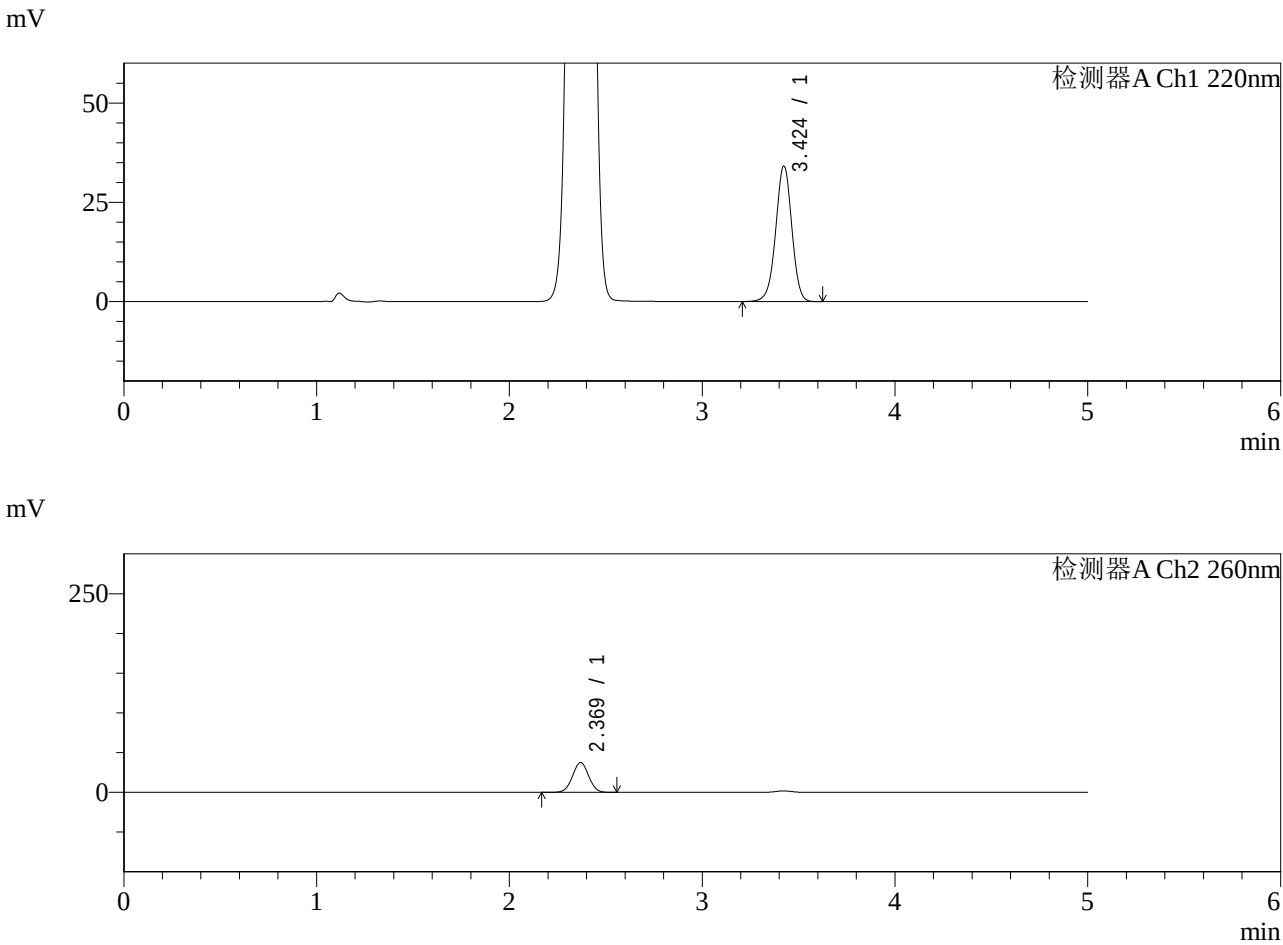

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.424	195640	100.000	34074	8356	0.979	--
总计		195640	100.000	34074			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	219401	100.000	37443	3762	1.016	--
总计		219401	100.000	37443			

图130 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-471-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 23:15:57
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

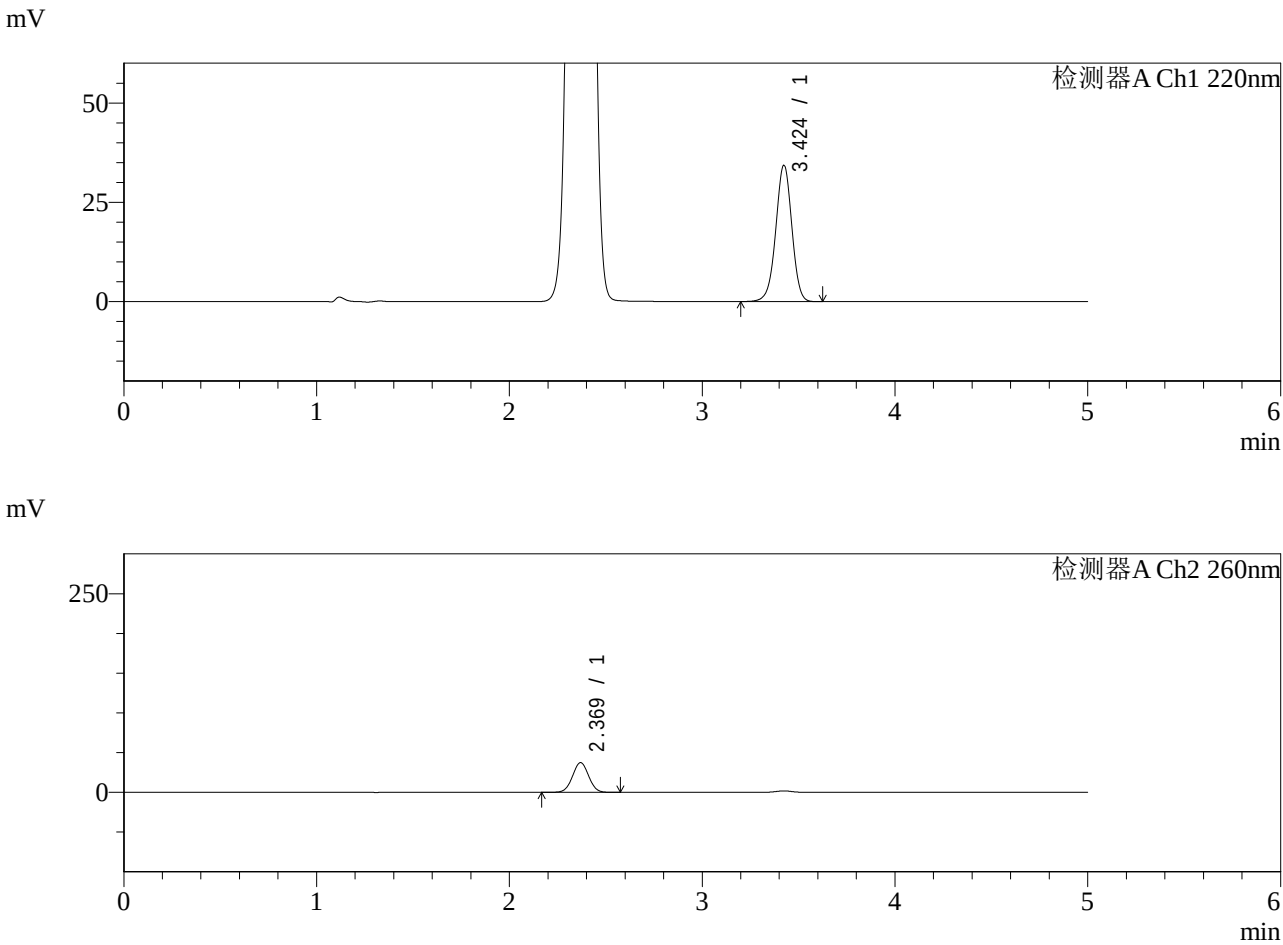

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.424	196739	100.000	34251	8366	0.978	--
总计		196739	100.000	34251			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	218716	100.000	37334	3762	1.016	--
总计		218716	100.000	37334			

图131 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-472-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 23:21:19
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

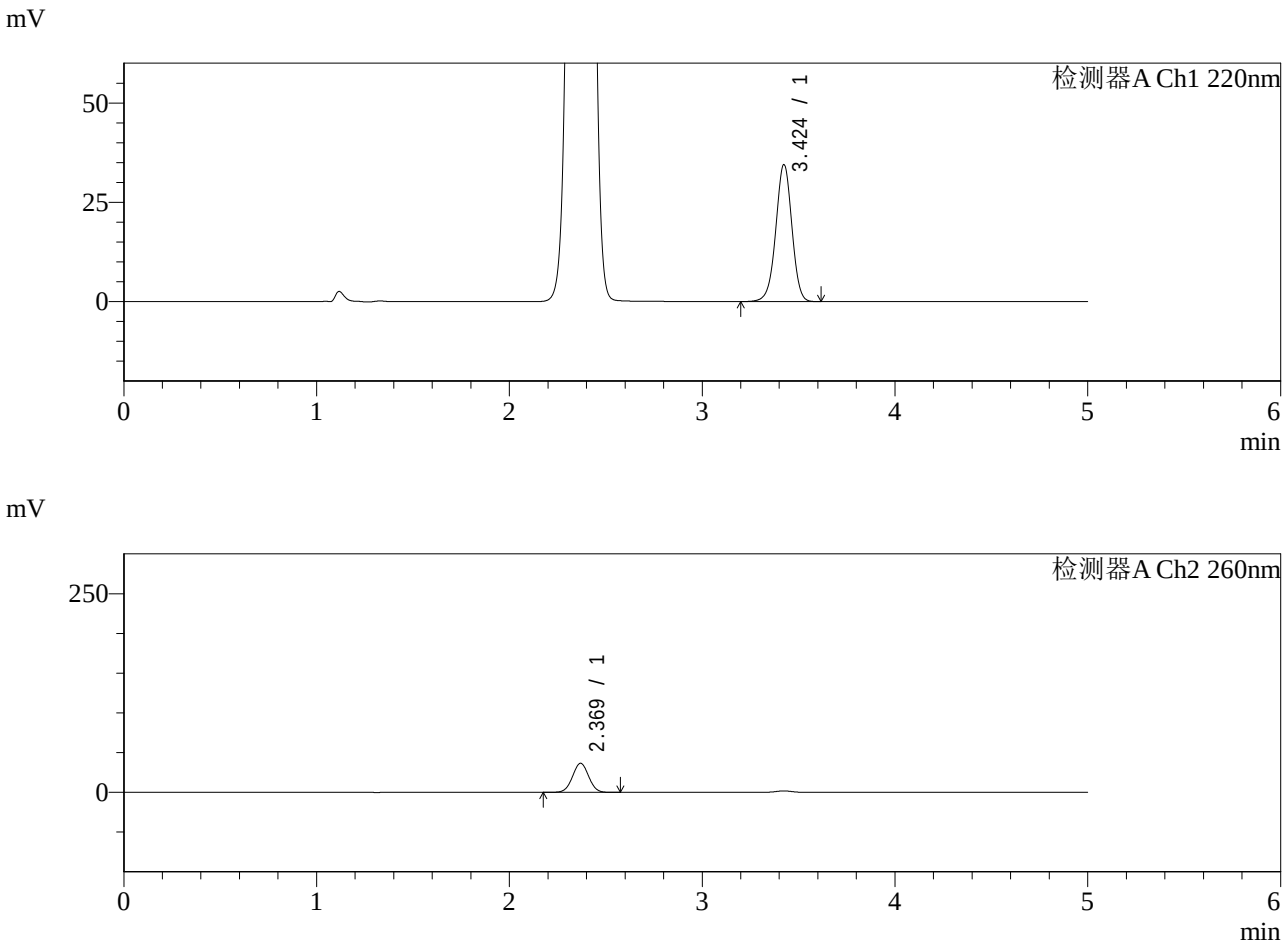

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.424	197705	100.000	34394	8359	0.978	--
总计		197705	100.000	34394			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	214289	100.000	36581	3763	1.017	--
总计		214289	100.000	36581			

图132 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-473-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 23:26:40
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

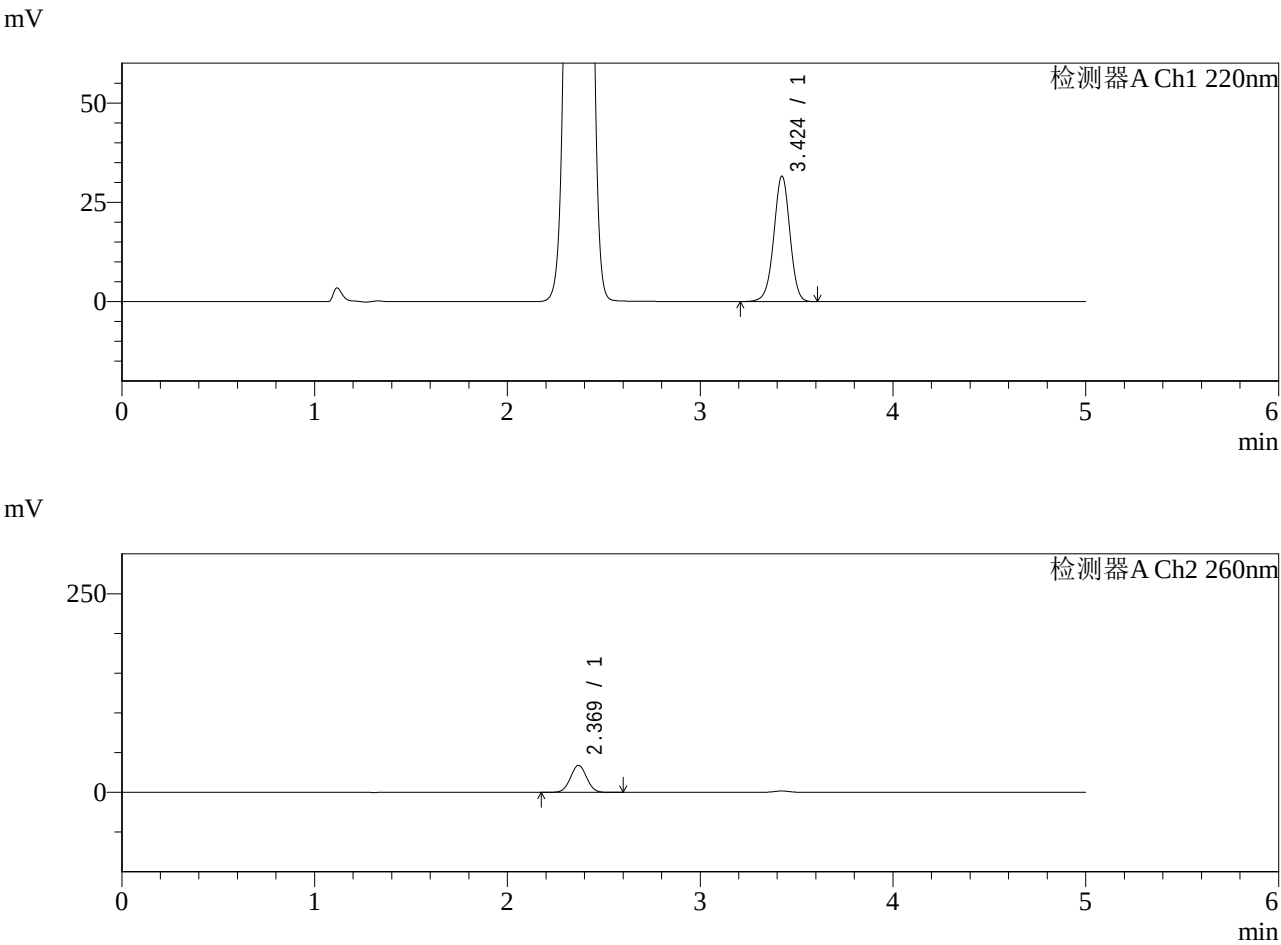

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.424	181107	100.000	31499	8365	0.979	--
总计		181107	100.000	31499			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	198993	100.000	33969	3770	1.019	--
总计		198993	100.000	33969			

图133 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-474-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 23:32:00
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

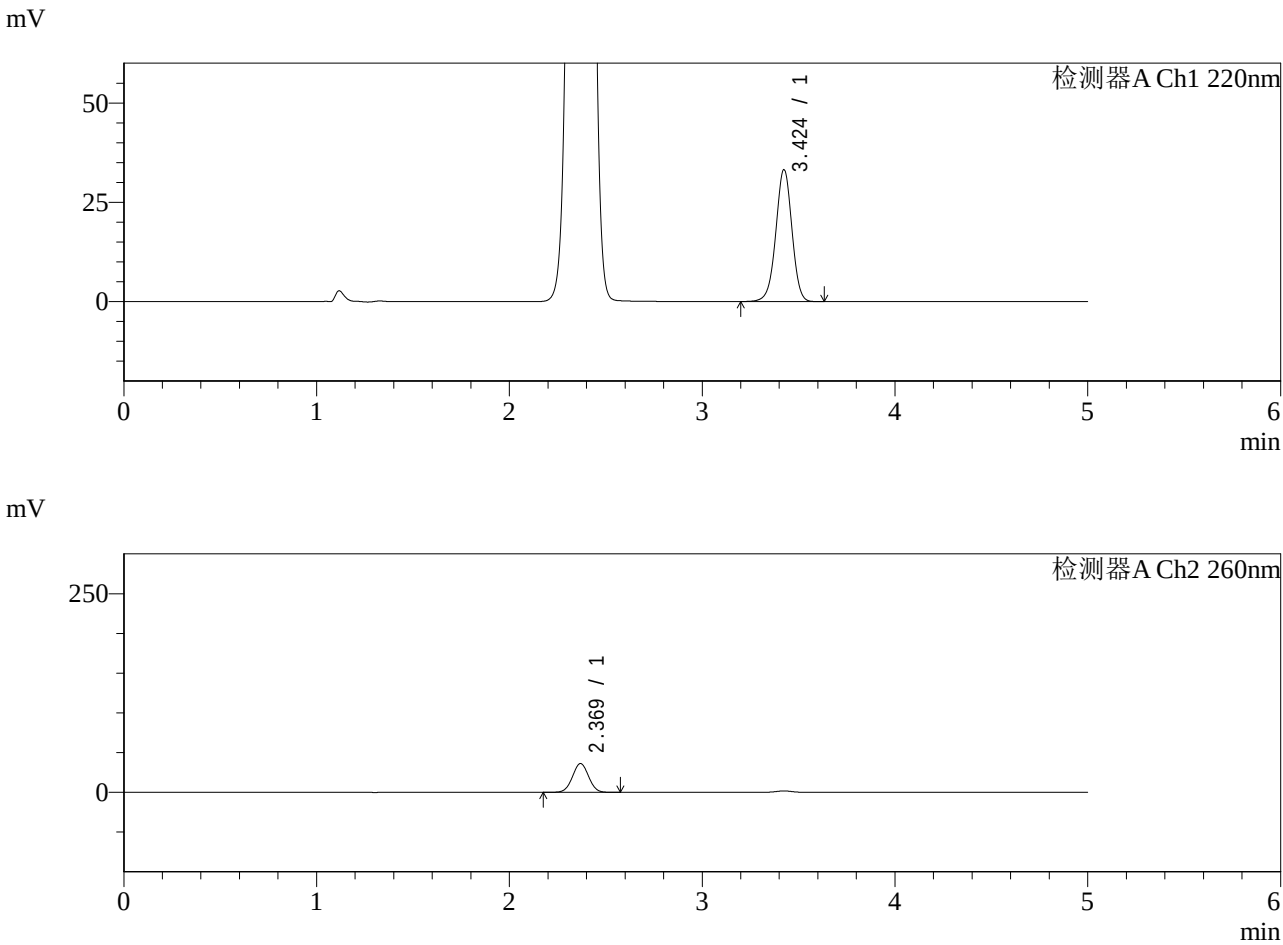

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.424	190475	100.000	33117	8362	0.978	--
总计		190475	100.000	33117			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	212152	100.000	36203	3761	1.017	--
总计		212152	100.000	36203			

图134 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-475-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 23:37:22
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

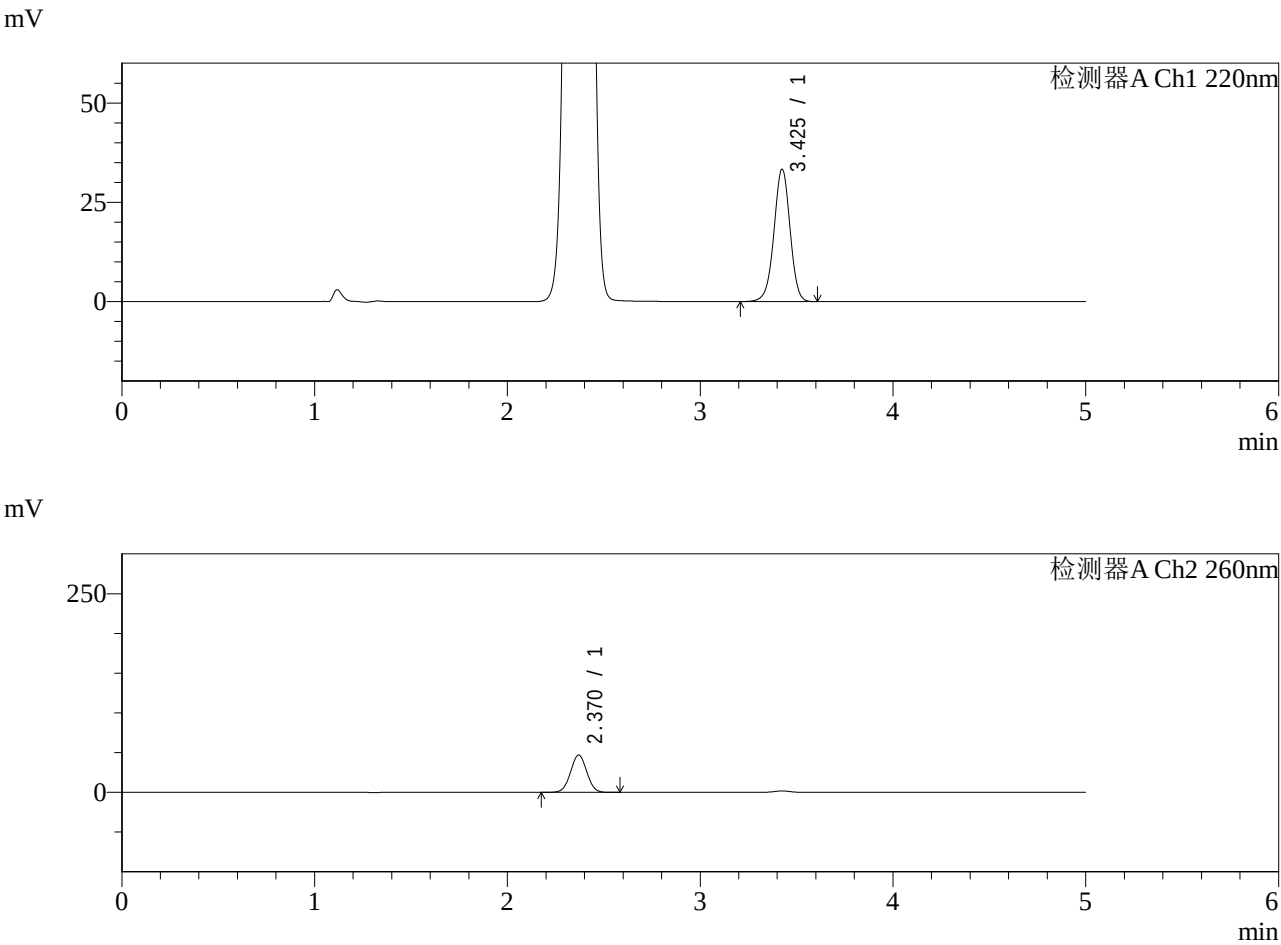

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.425	191064	100.000	33178	8367	0.978	--
总计		191064	100.000	33178			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	275727	100.000	46928	3734	1.013	--
总计		275727	100.000	46928			

图135 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-476-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 23:42:44
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

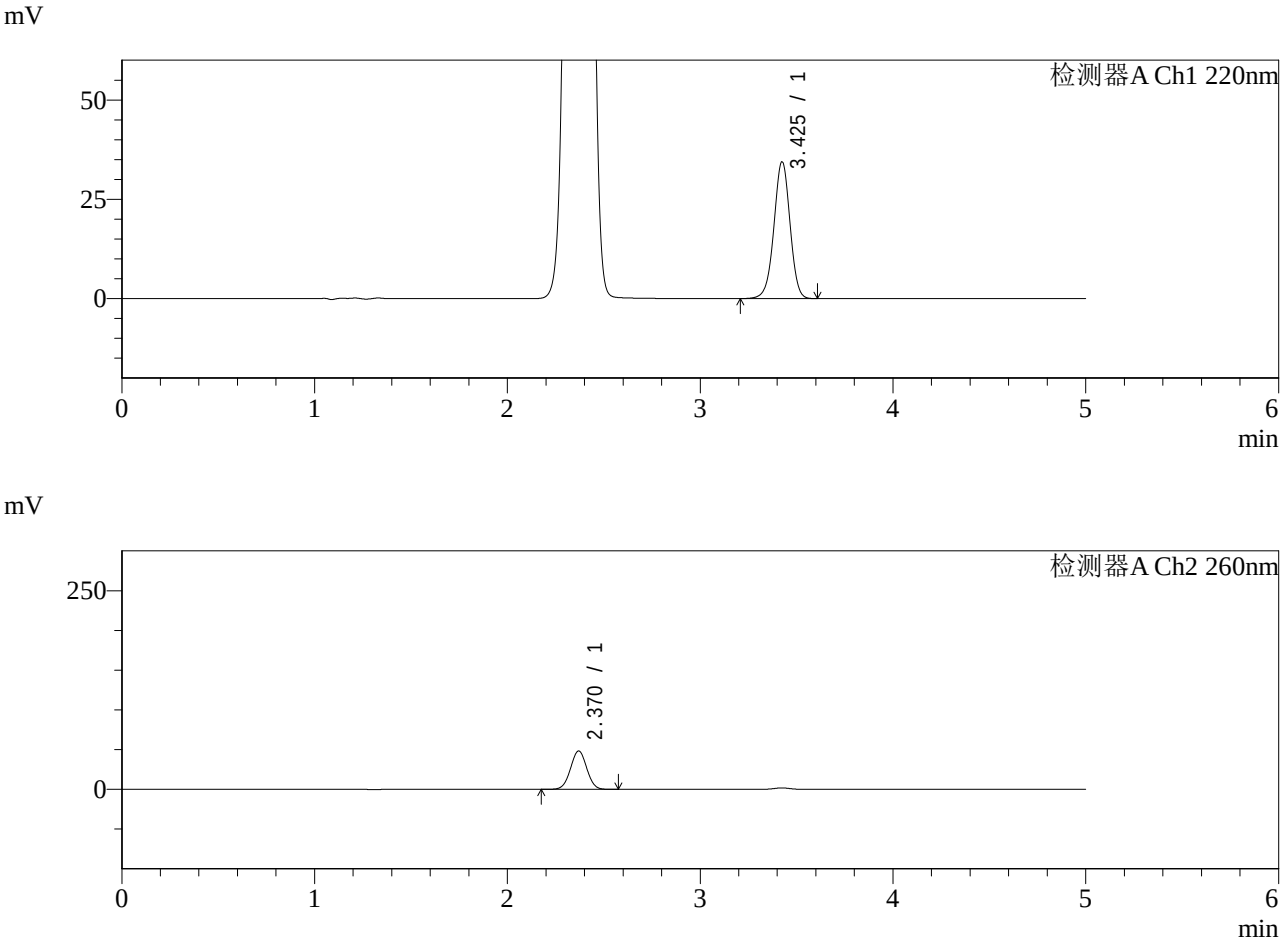

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.425	197277	100.000	34294	8376	0.978	--
总计		197277	100.000	34294			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	283905	100.000	48287	3730	1.013	--
总计		283905	100.000	48287			

图136 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-477-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 23:48:05
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

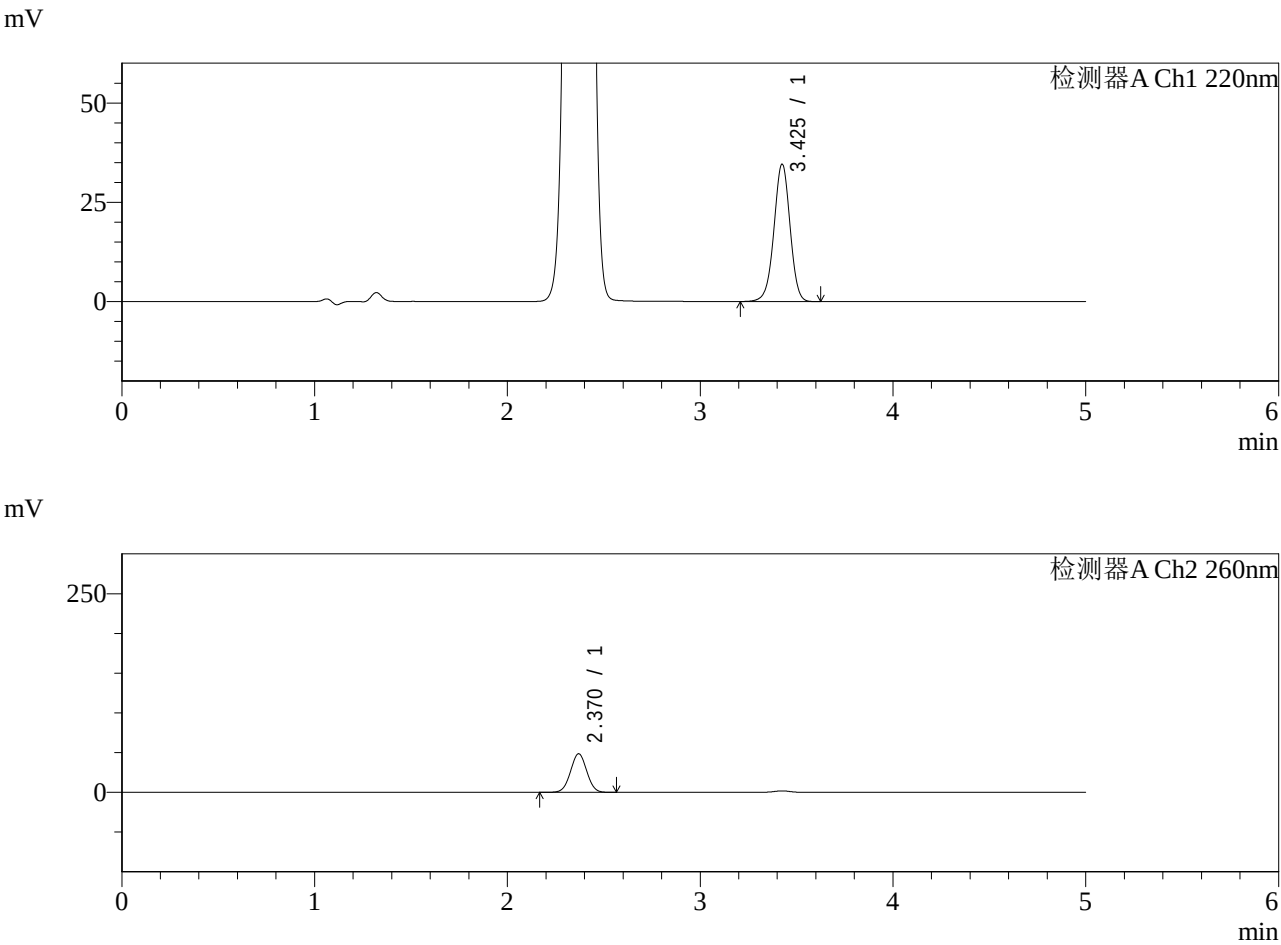

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.425	198309	100.000	34446	8369	0.978	--
总计		198309	100.000	34446			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	285447	100.000	48524	3726	1.012	--
总计		285447	100.000	48524			

图137 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-478-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 23:53:27
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

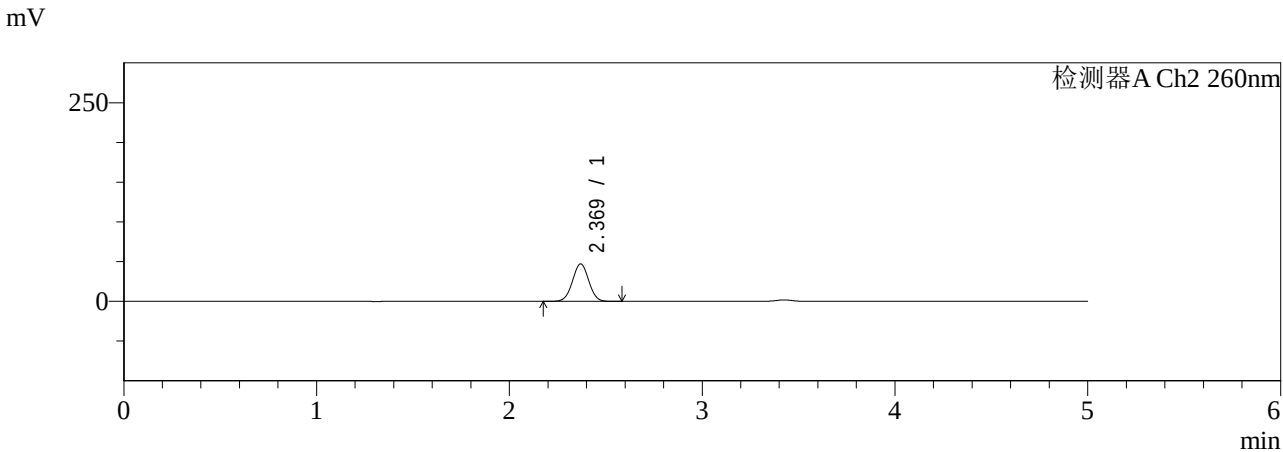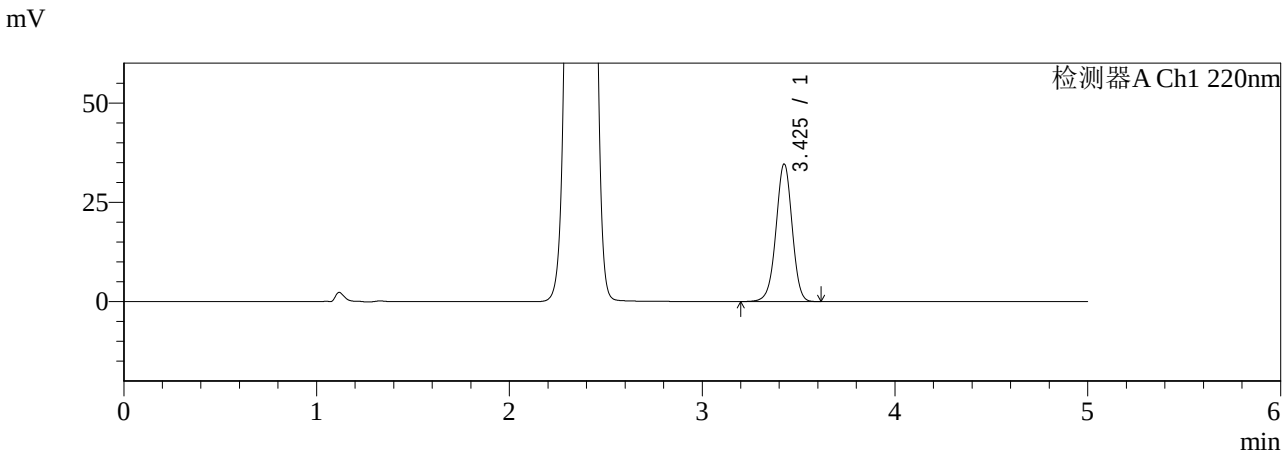

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.425	198518	100.000	34467	8372	0.977	--
总计		198518	100.000	34467			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	277160	100.000	47158	3732	1.014	--
总计		277160	100.000	47158			

图138 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-479-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/15 23:58:49
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

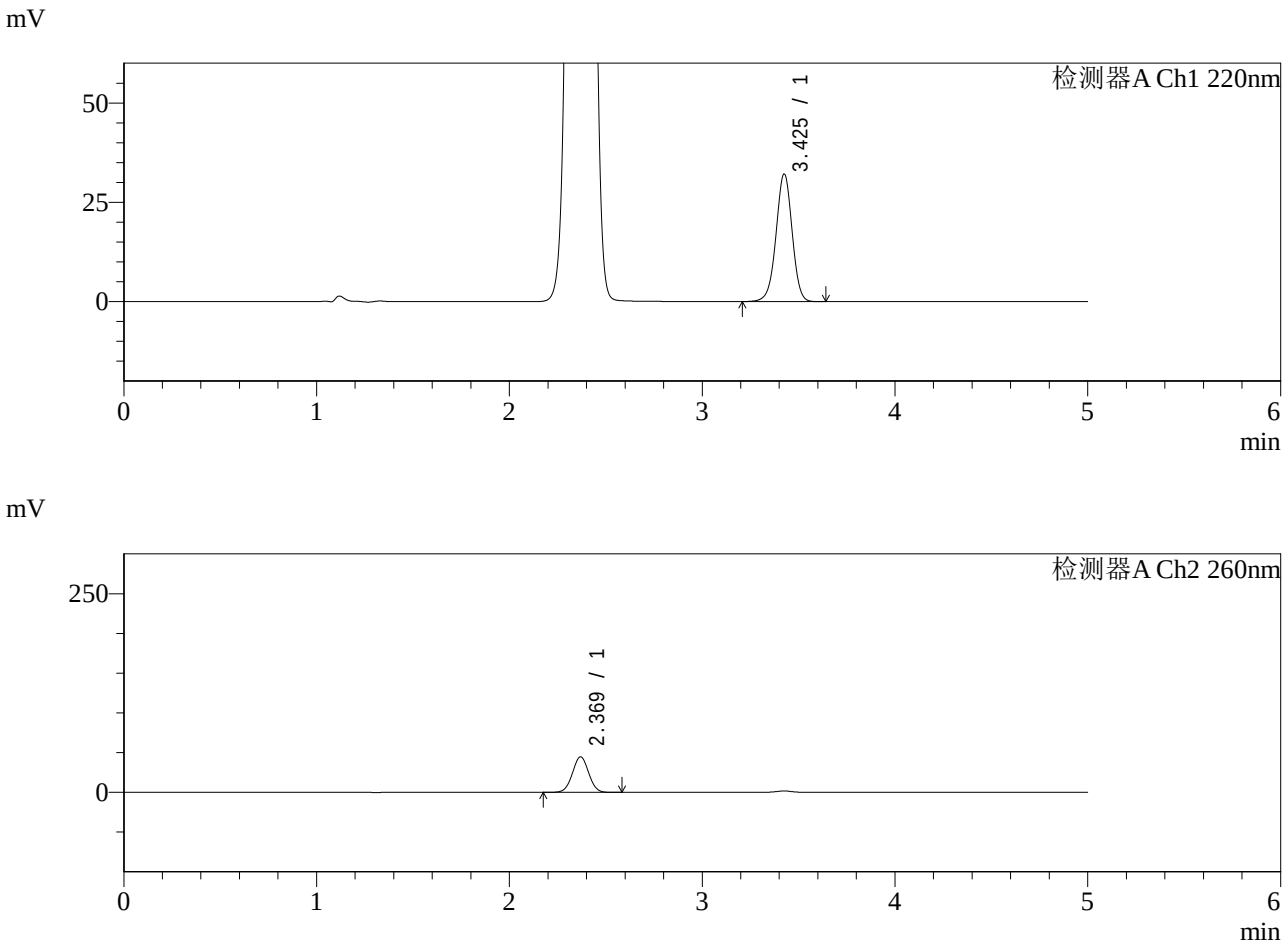

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.425	184235	100.000	31951	8367	0.979	--
总计		184235	100.000	31951			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	261908	100.000	44562	3737	1.014	--
总计		261908	100.000	44562			

图139 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-480-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 00:04:10
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:20:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

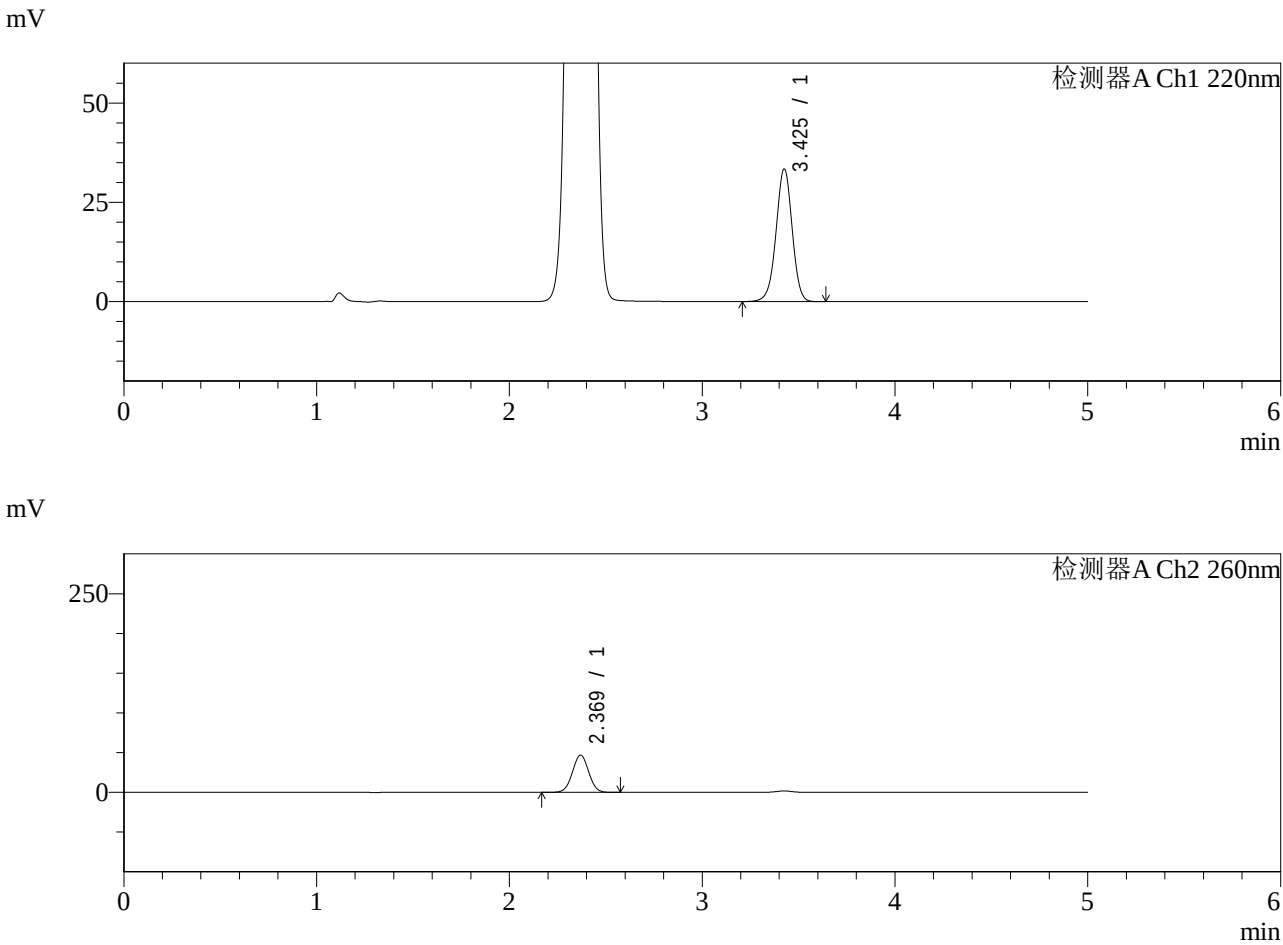

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.425	191420	100.000	33189	8355	0.978	--
总计		191420	100.000	33189			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	275246	100.000	46759	3728	1.013	--
总计		275246	100.000	46759			

图140 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-481-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 00:09:32
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

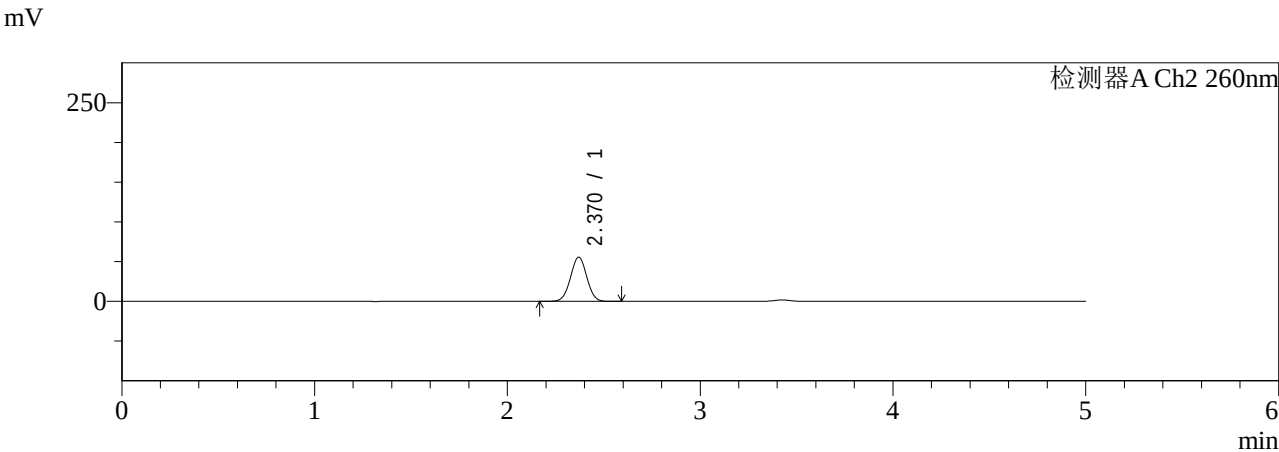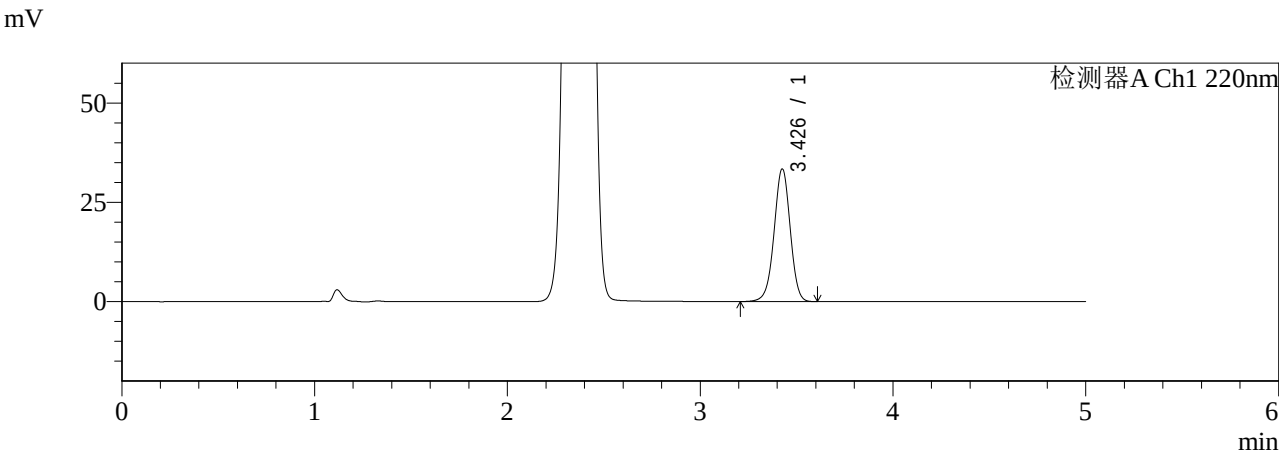

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	191569	100.000	33185	8362	0.978	--
总计		191569	100.000	33185			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	327762	100.000	55666	3715	1.010	--
总计		327762	100.000	55666			

图141 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-482-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 00:14:54
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

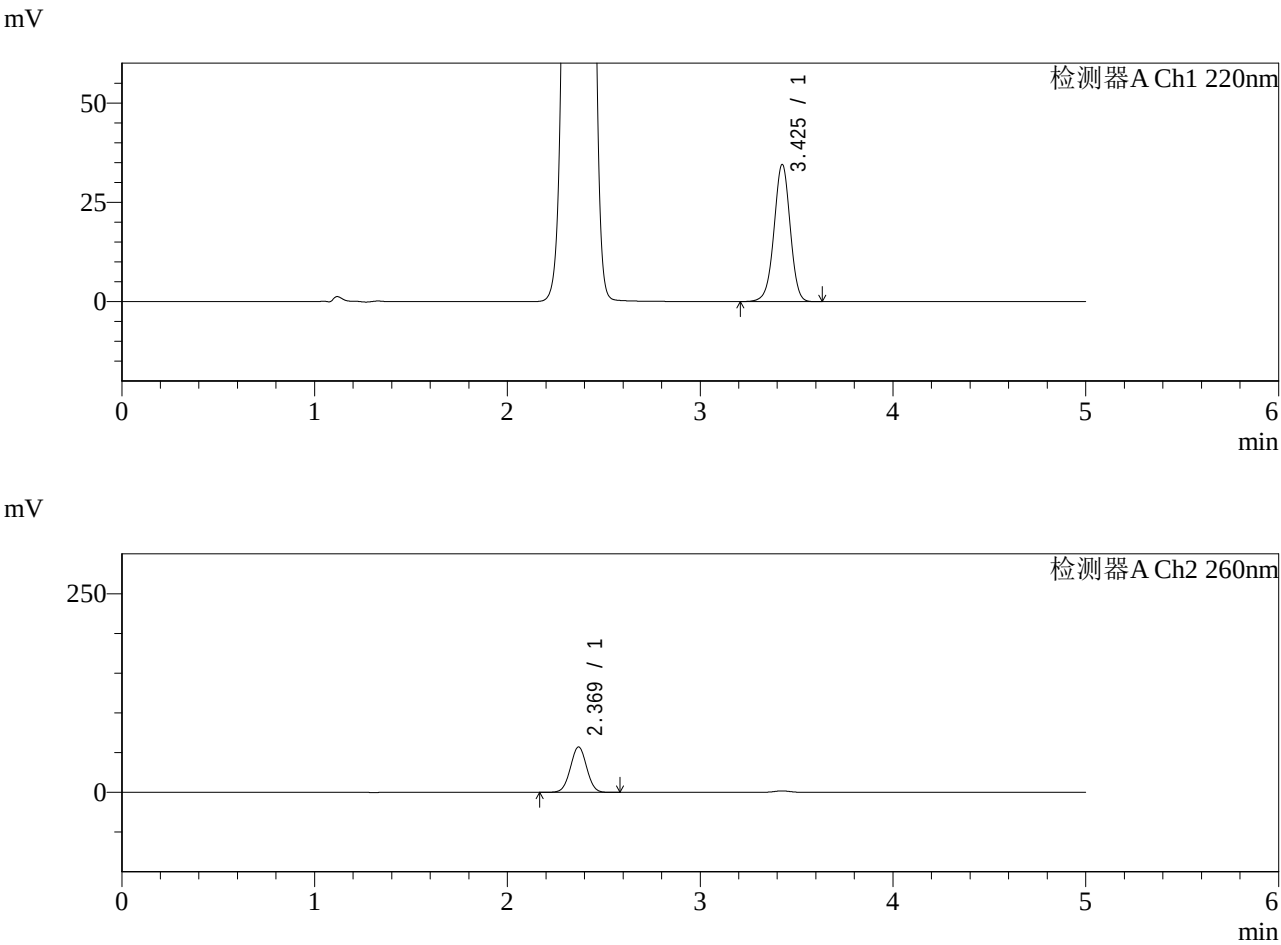

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.425	198048	100.000	34329	8362	0.978	--
总计		198048	100.000	34329			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	336673	100.000	57065	3707	1.011	--
总计		336673	100.000	57065			

图142 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-483-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 00:20:17
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

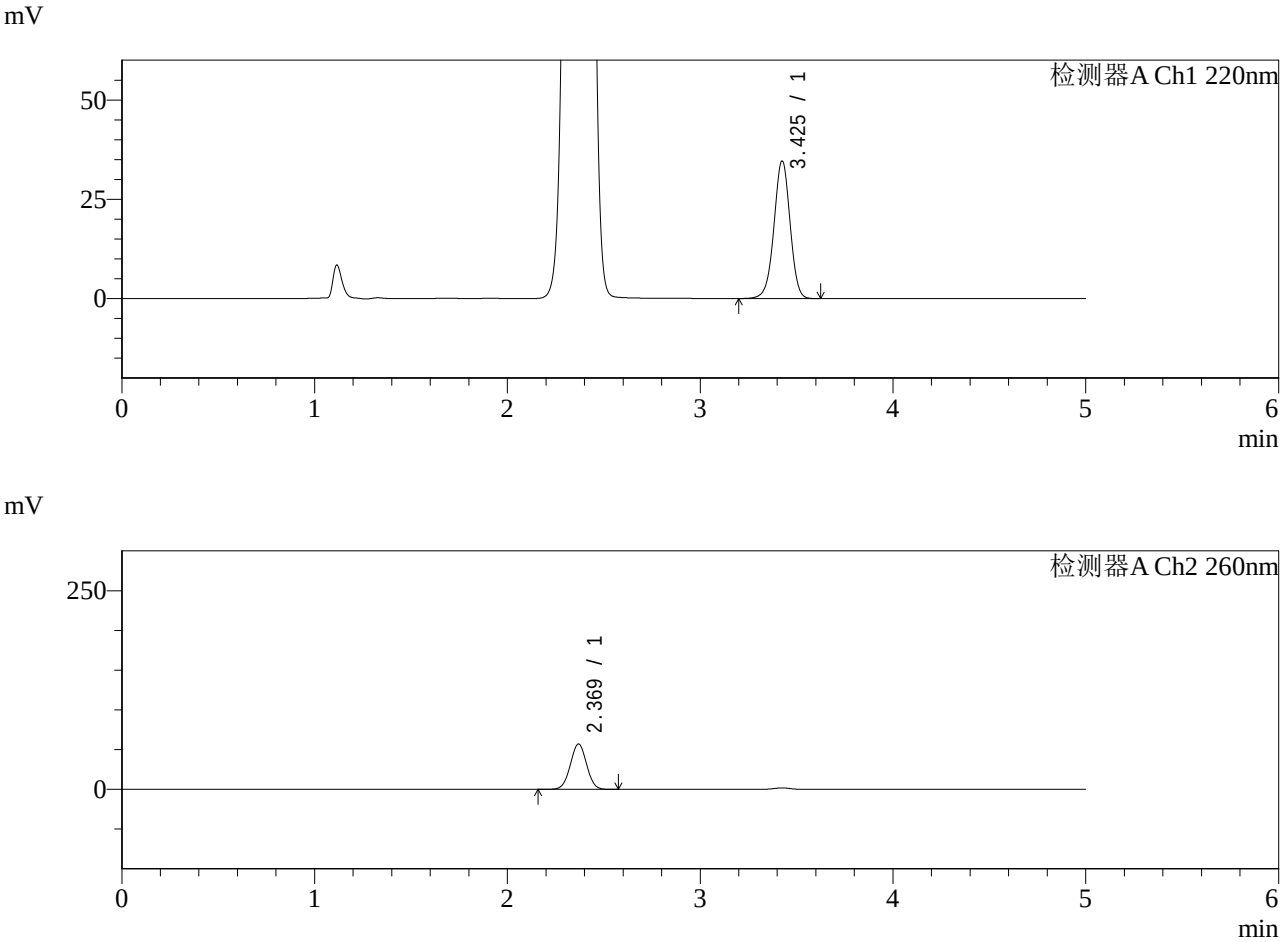

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.425	198611	100.000	34482	8366	0.978	--
总计		198611	100.000	34482			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	336534	100.000	56981	3703	1.011	--
总计		336534	100.000	56981			

图143 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-484-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 00:25:39
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

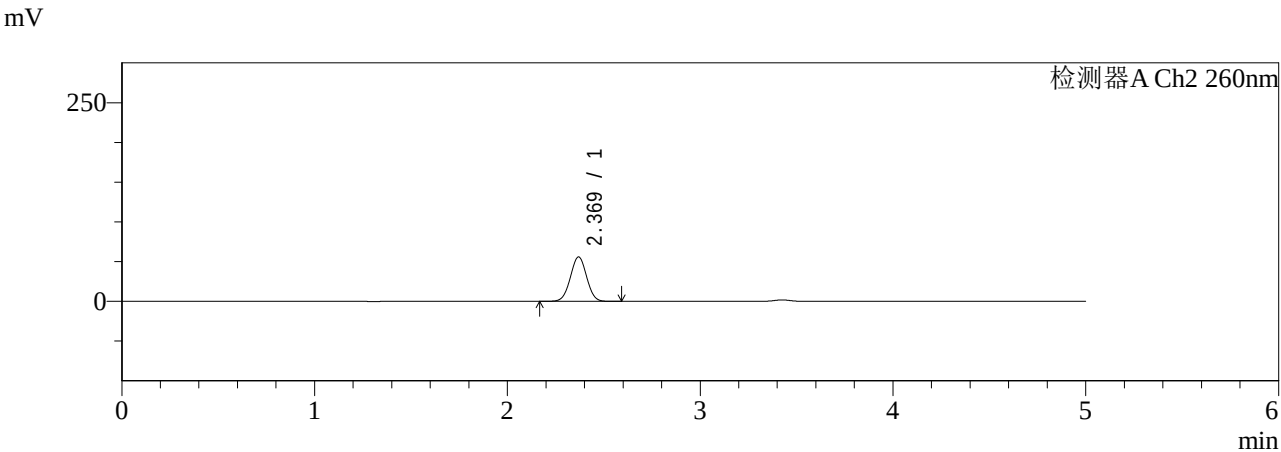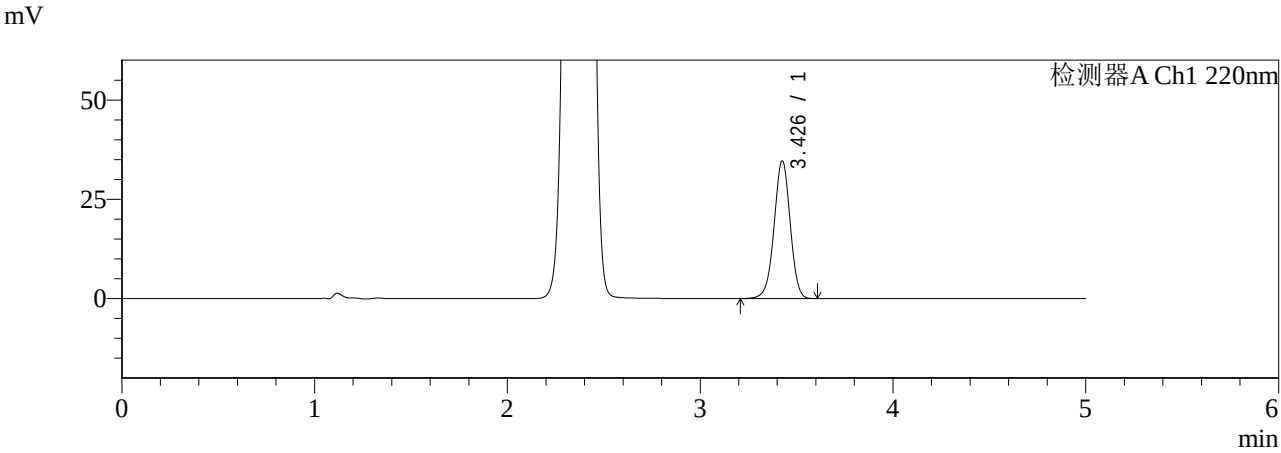

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	198648	100.000	34432	8358	0.978	--
总计		198648	100.000	34432			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	329362	100.000	55852	3711	1.011	--
总计		329362	100.000	55852			

图144 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-485-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 00:31:00
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

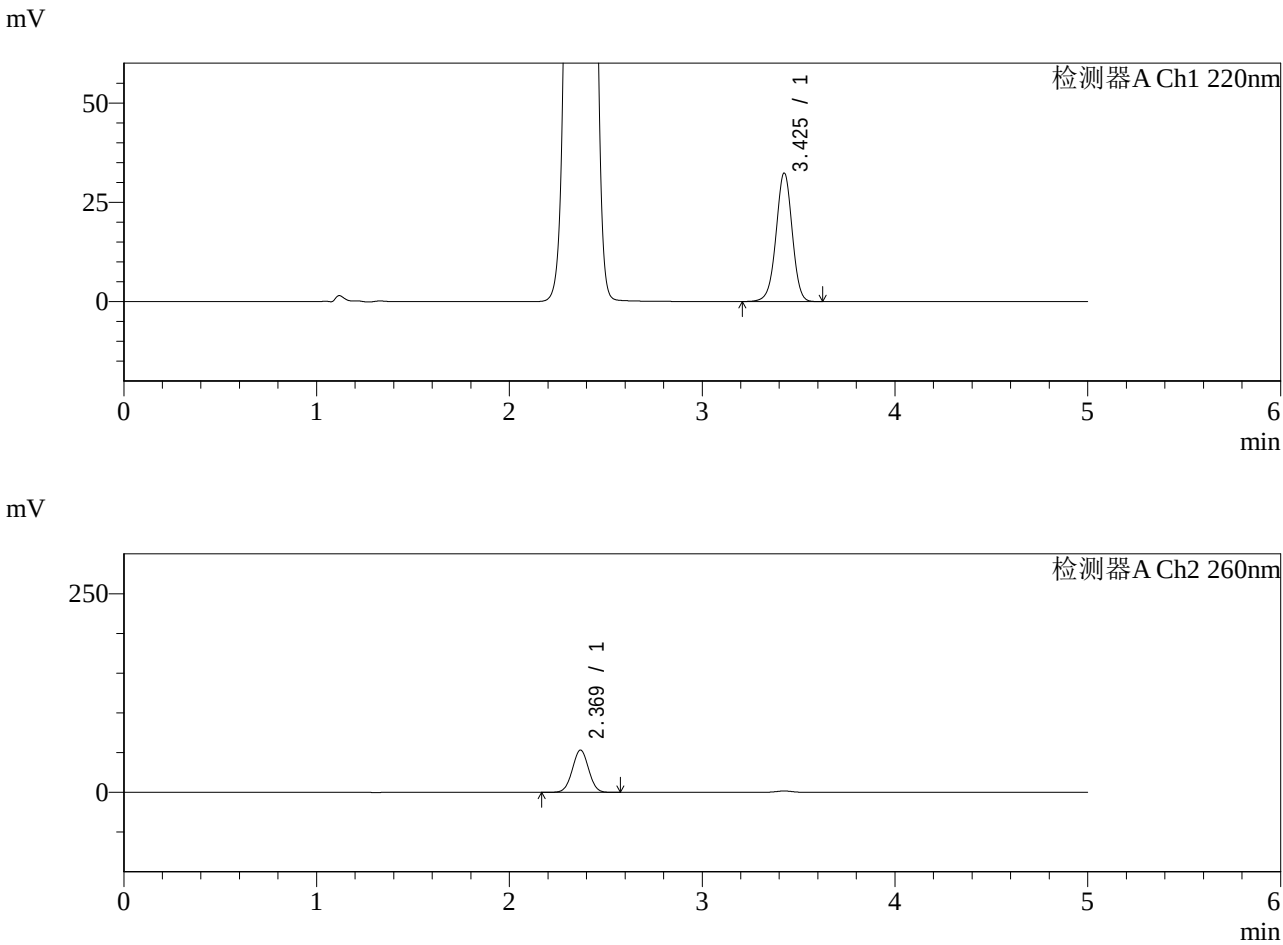

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.425	185565	100.000	32164	8353	0.978	--
总计		185565	100.000	32164			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	313195	100.000	53112	3714	1.012	--
总计		313195	100.000	53112			

图145 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-486-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 00:36:22
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

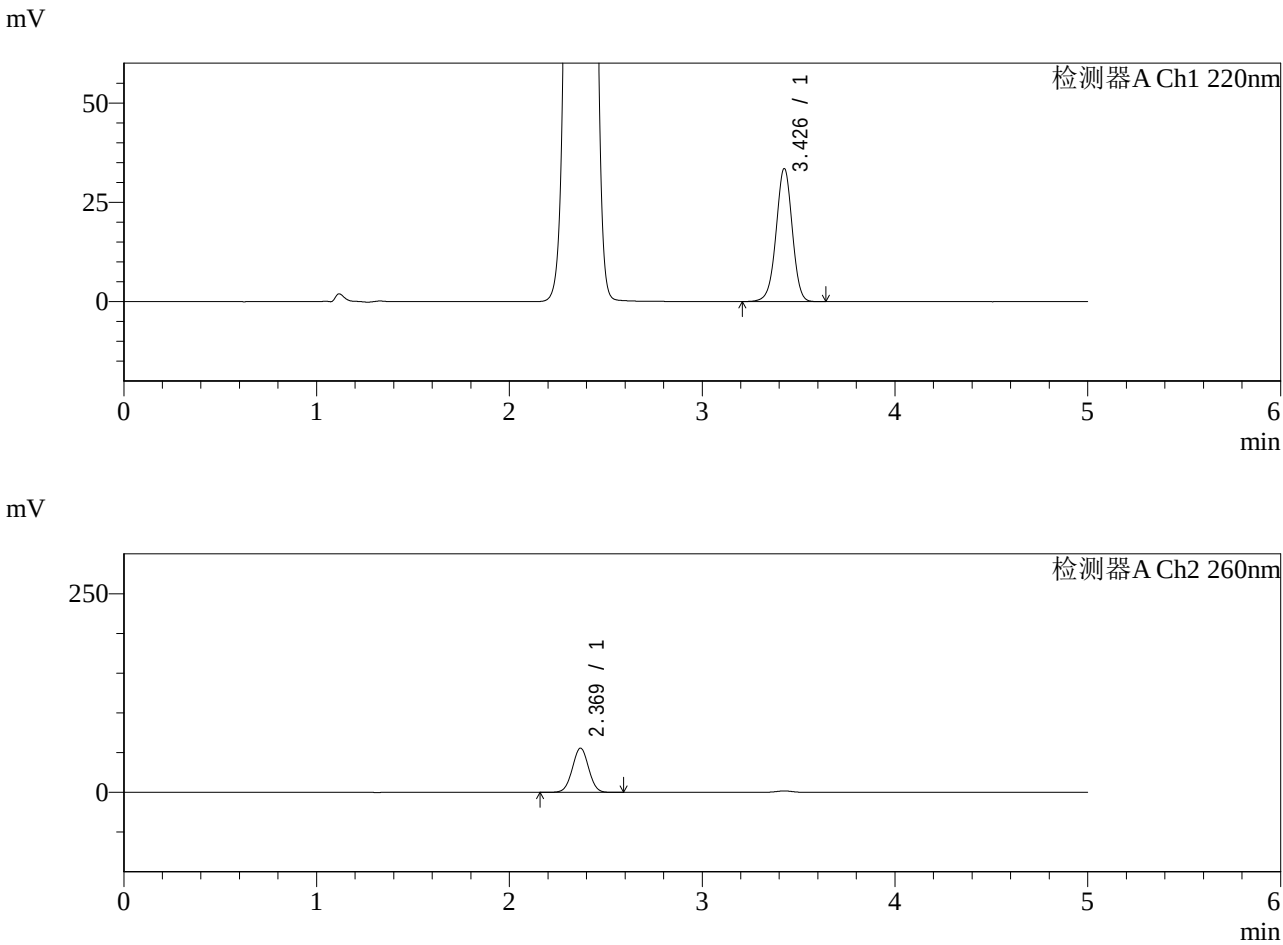

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	192308	100.000	33279	8357	0.978	--
总计		192308	100.000	33279			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	327866	100.000	55525	3706	1.010	--
总计		327866	100.000	55525			

图146 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-487-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 00:41:44
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

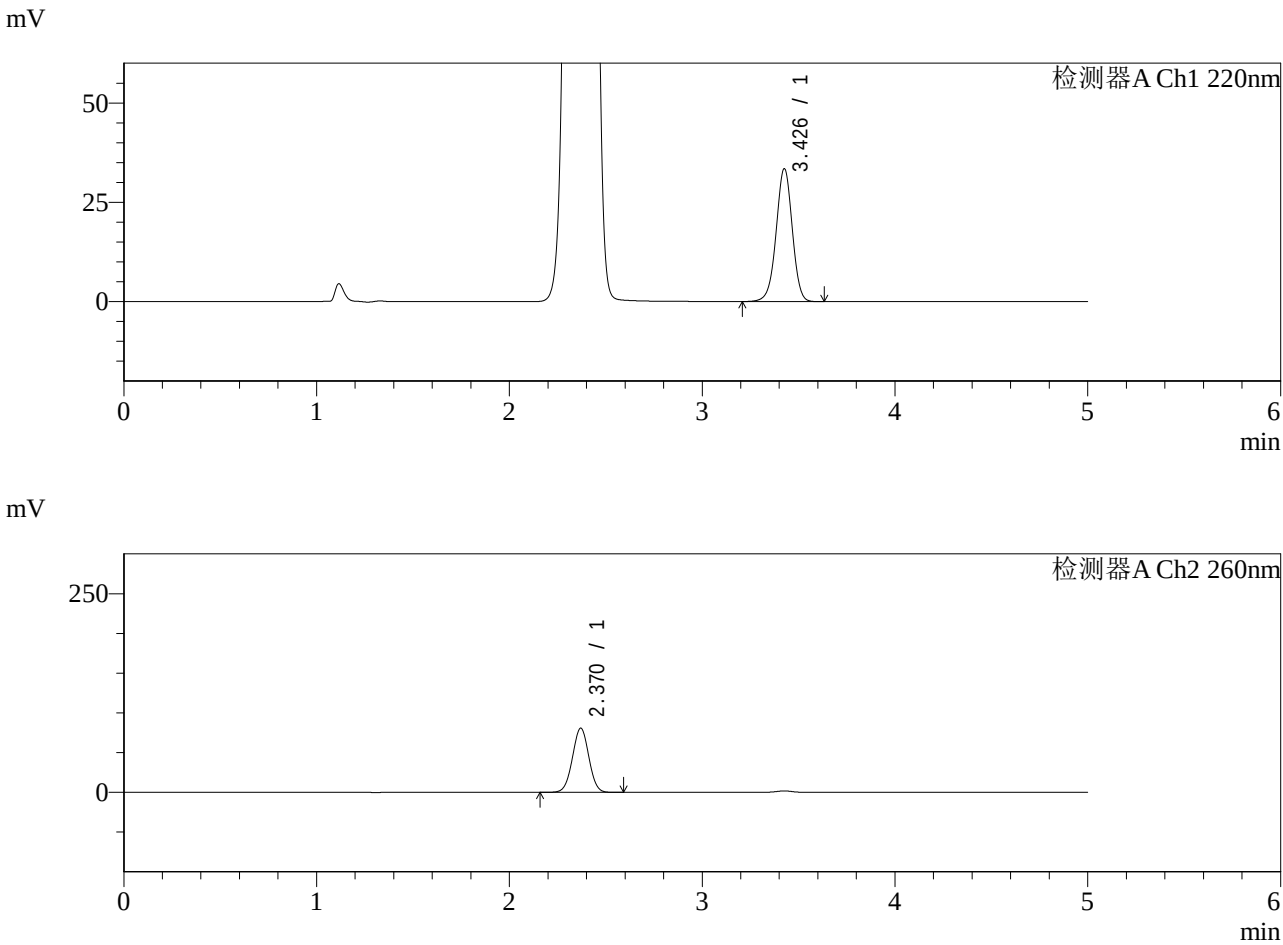

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	191724	100.000	33212	8371	0.977	--
总计		191724	100.000	33212			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	478724	100.000	80823	3669	1.003	--
总计		478724	100.000	80823			

图147 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片1
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-488-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 00:47:07
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

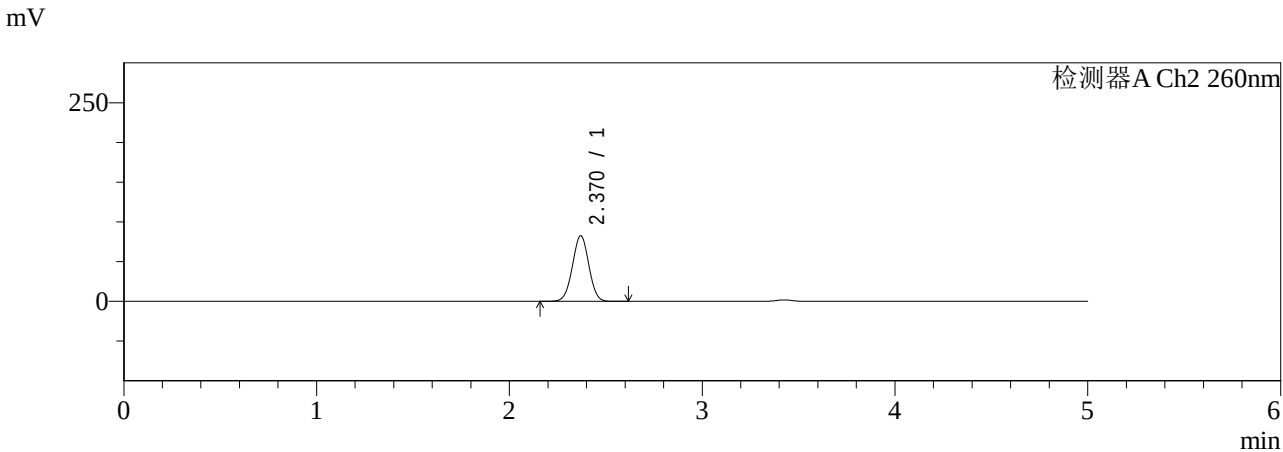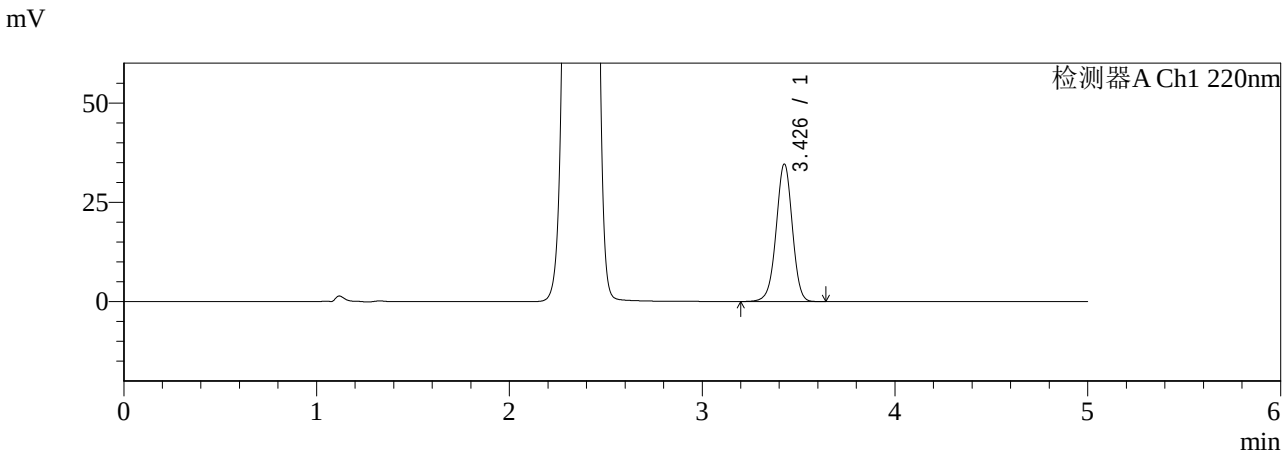

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	198616	100.000	34405	8360	0.978	--
总计		198616	100.000	34405			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	489843	100.000	82621	3664	1.003	--
总计		489843	100.000	82621			

图148 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-489-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 00:52:29
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

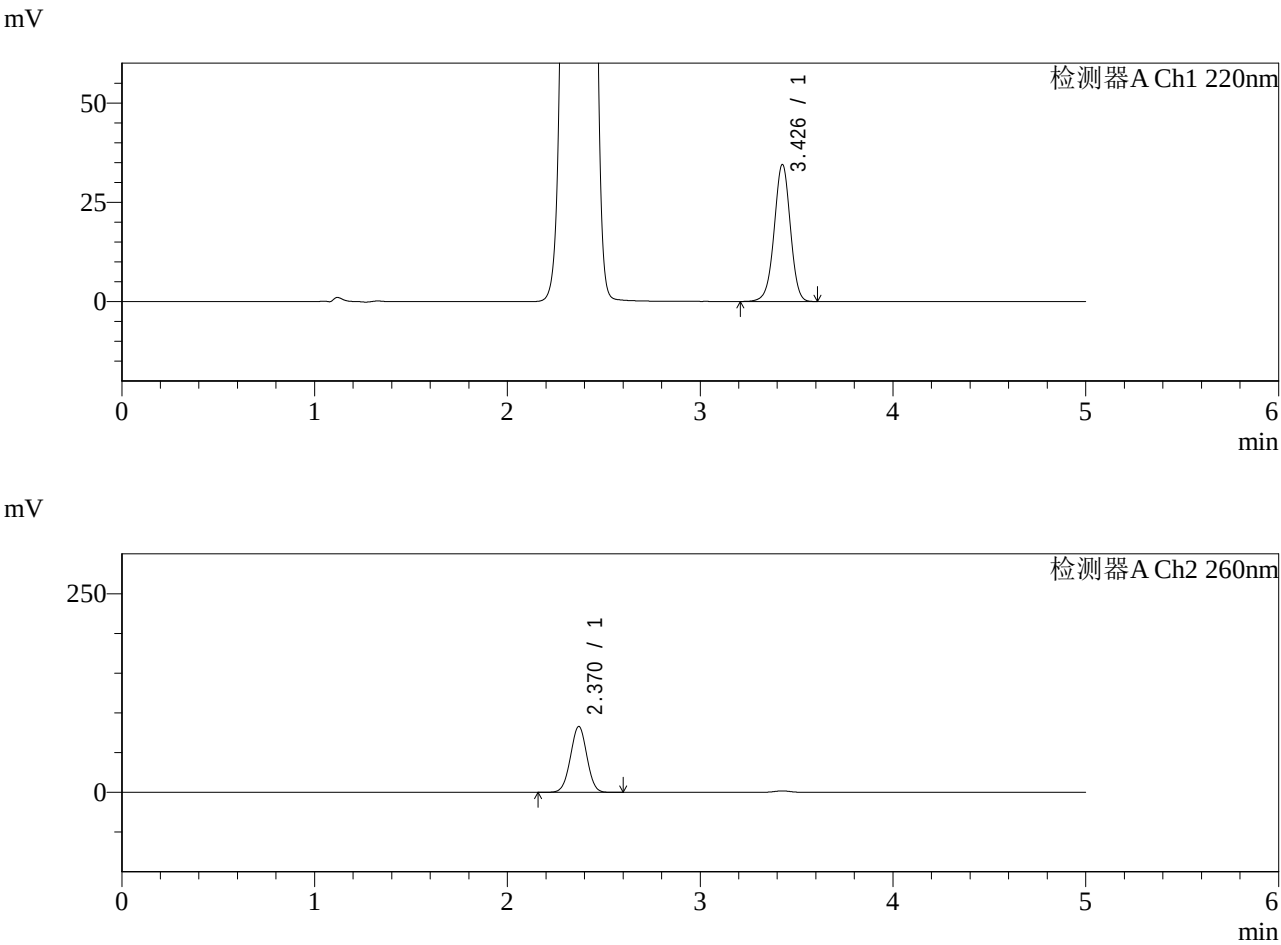

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	197814	100.000	34282	8365	0.977	--
总计		197814	100.000	34282			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	491314	100.000	82942	3664	1.003	--
总计		491314	100.000	82942			

图149 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-490-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 00:57:52
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

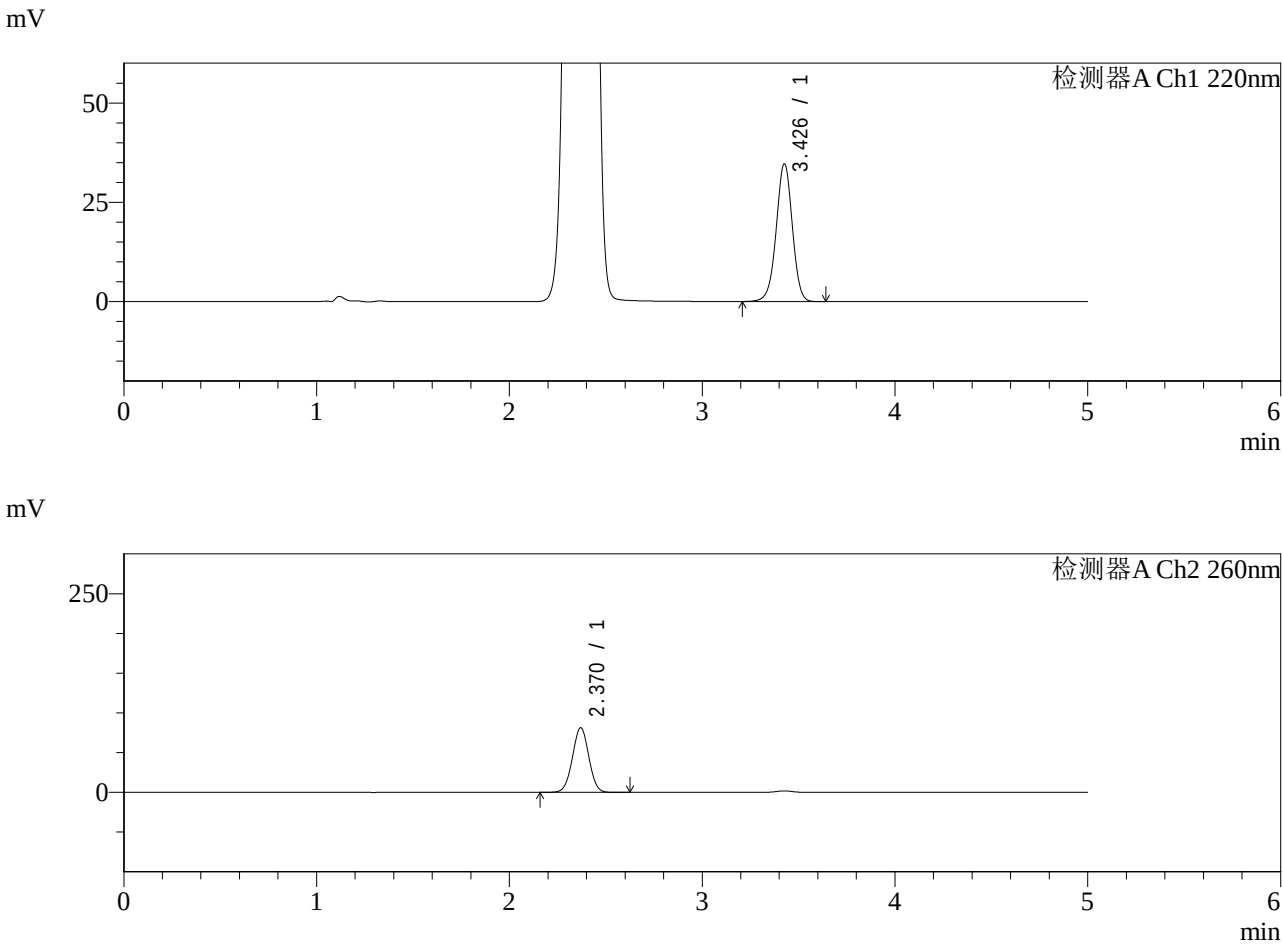

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	198877	100.000	34460	8367	0.978	--
总计		198877	100.000	34460			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	482050	100.000	81326	3669	1.003	--
总计		482050	100.000	81326			

图150 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-491-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 01:03:13
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

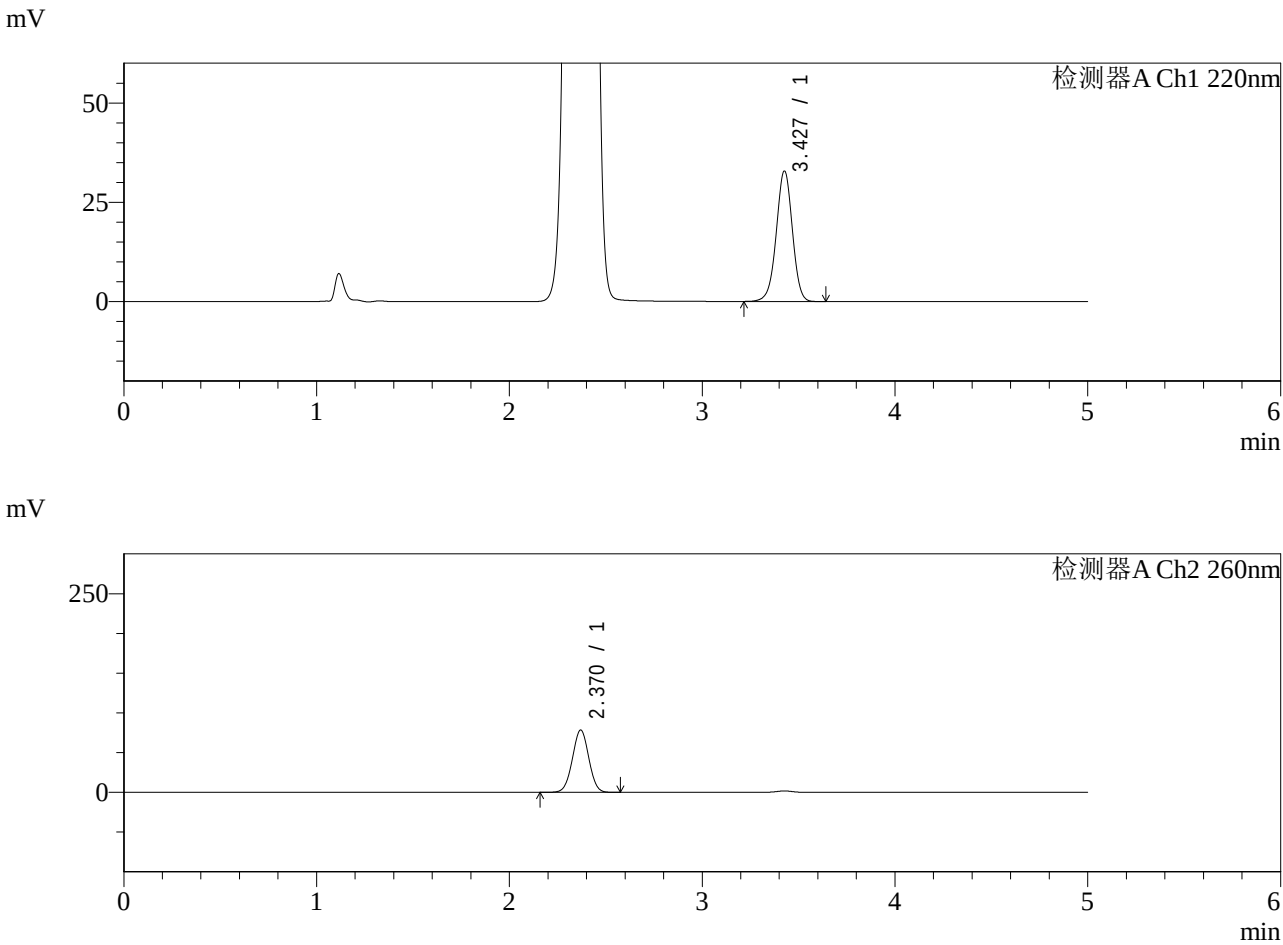

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	188336	100.000	32675	8366	0.978	--
总计		188336	100.000	32675			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	464688	100.000	78428	3667	1.004	--
总计		464688	100.000	78428			

图151 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-492-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 01:08:35
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

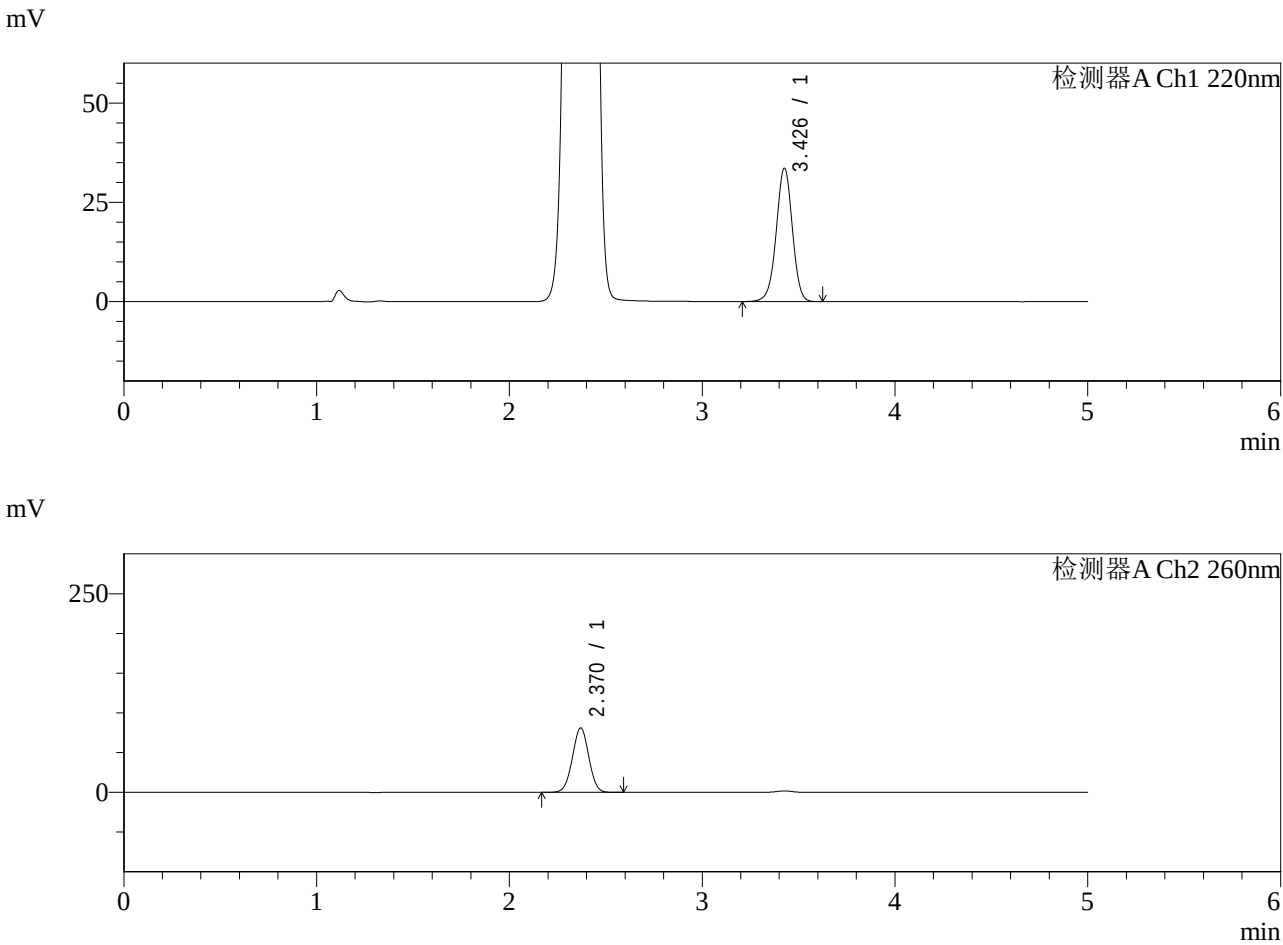

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	192523	100.000	33403	8368	0.977	--
总计		192523	100.000	33403			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	480131	100.000	81029	3668	1.003	--
总计		480131	100.000	81029			

图152 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片6
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-493-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-180min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 01:13:58
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

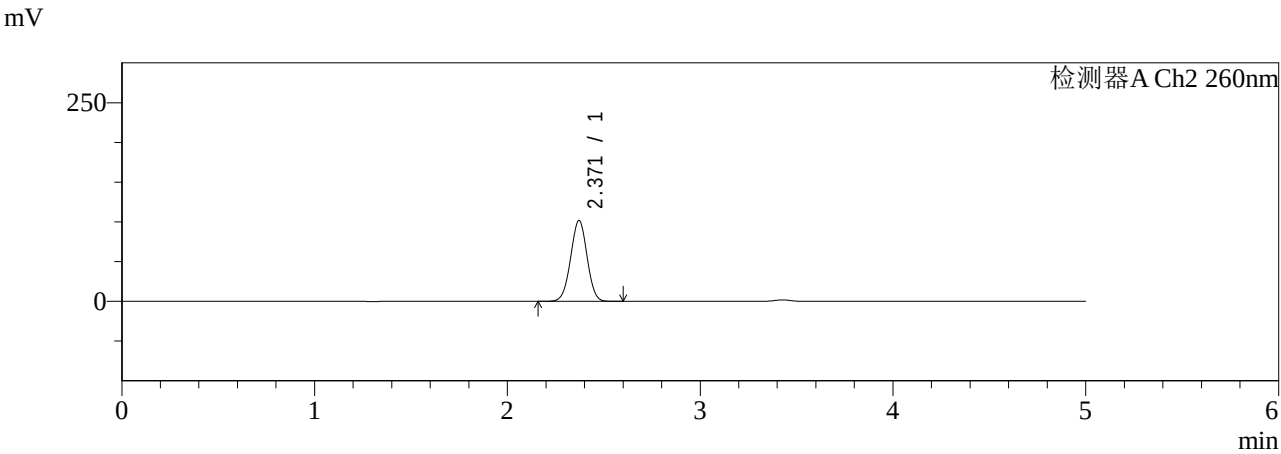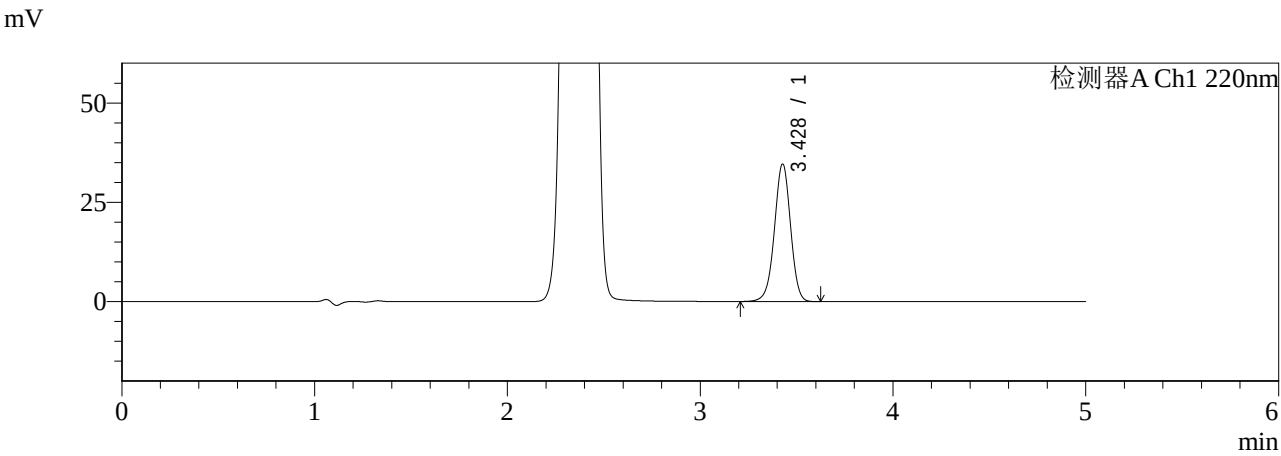

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	198485	100.000	34521	8377	0.977	--
总计		198485	100.000	34521			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	605368	100.000	101840	3641	0.996	--
总计		605368	100.000	101840			

图153 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-180min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-494-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-180min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 01:19:21
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

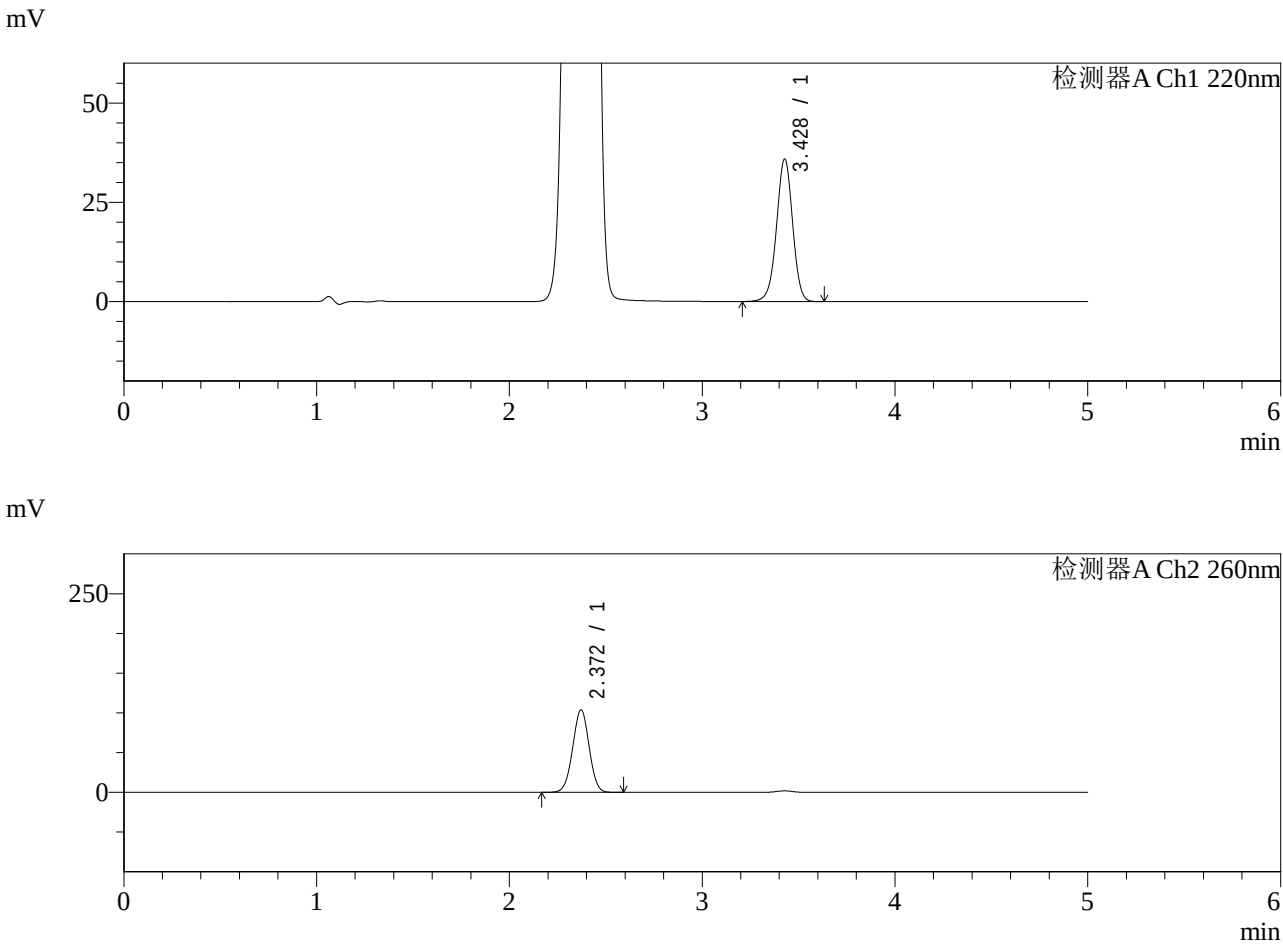

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	205733	100.000	35779	8375	0.977	--
总计		205733	100.000	35779			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	618446	100.000	103930	3632	0.996	--
总计		618446	100.000	103930			

图154 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-180min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-495-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-180min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 01:24:43
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

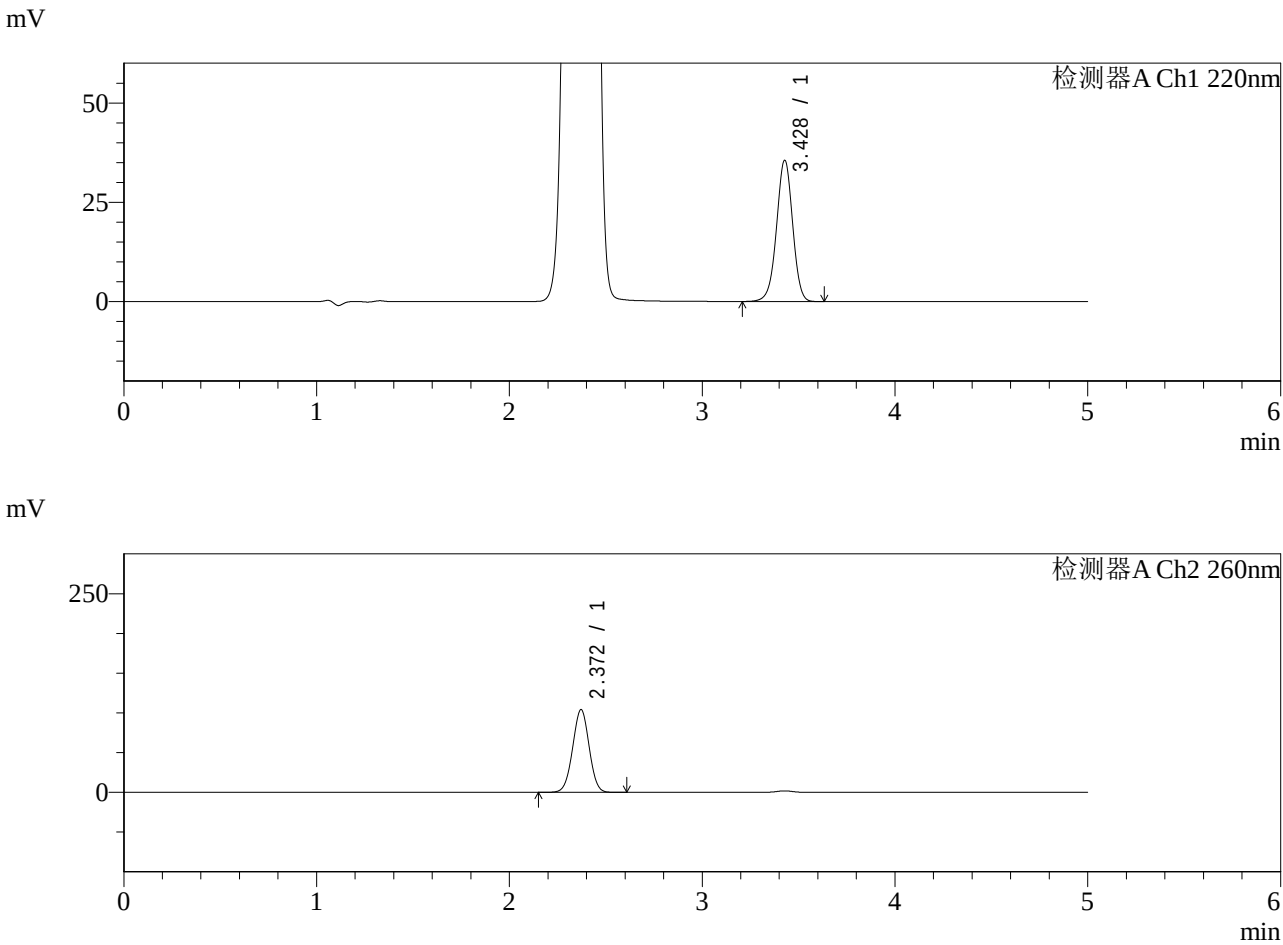

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	203970	100.000	35468	8369	0.978	--
总计		203970	100.000	35468			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	619957	100.000	104143	3634	0.996	--
总计		619957	100.000	104143			

图155 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-180min-片3
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-496-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-180min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 01:30:06
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

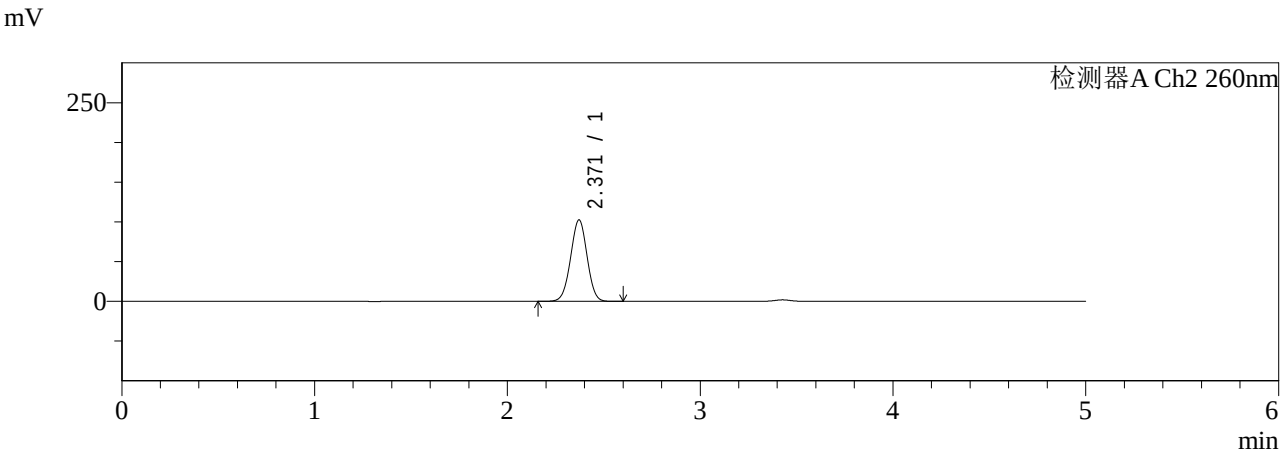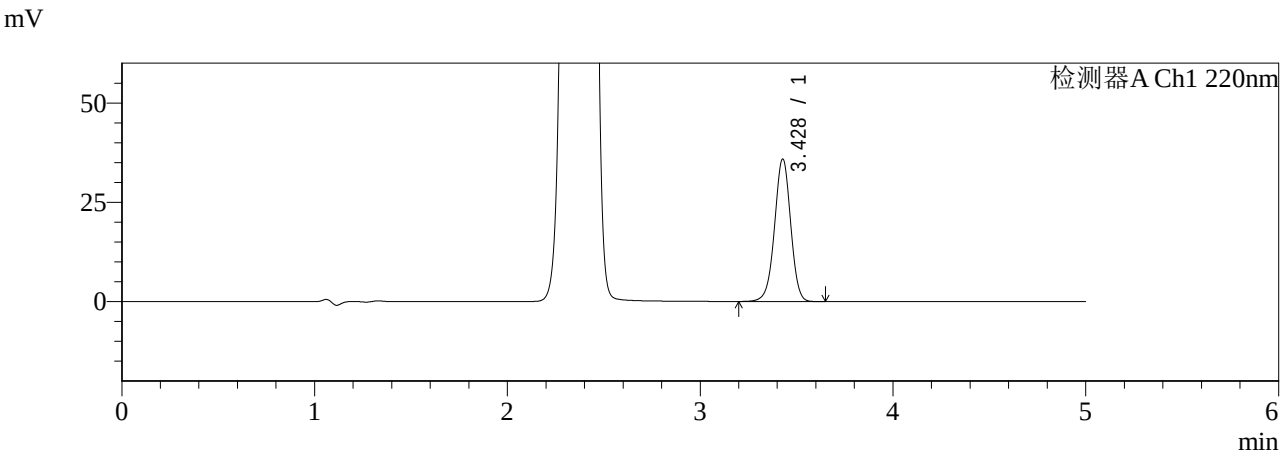

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	205657	100.000	35779	8385	0.978	--
总计		205657	100.000	35779			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	609690	100.000	102543	3639	0.997	--
总计		609690	100.000	102543			

图156 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-180min-片4
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-497-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-180min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 01:35:29
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

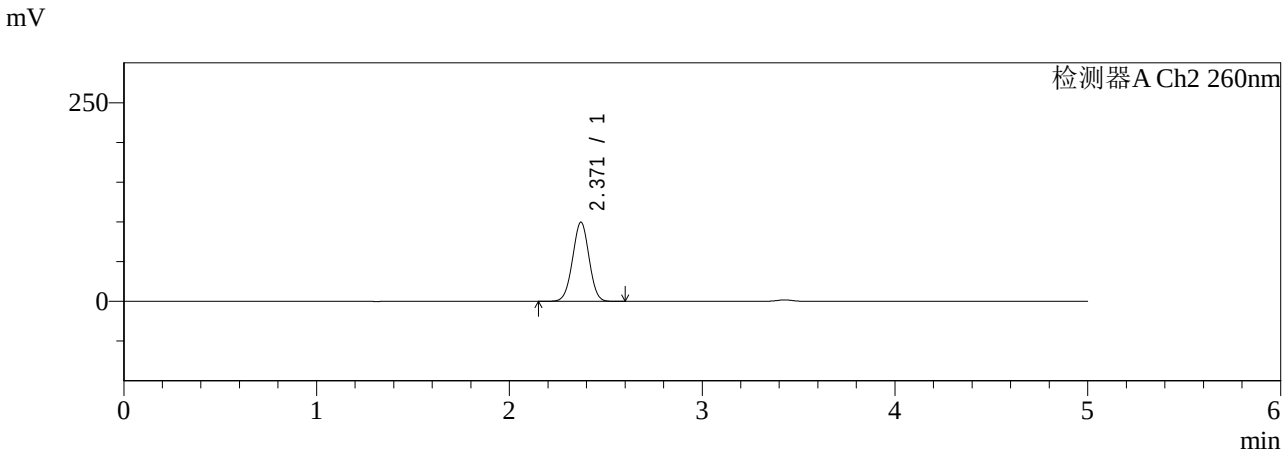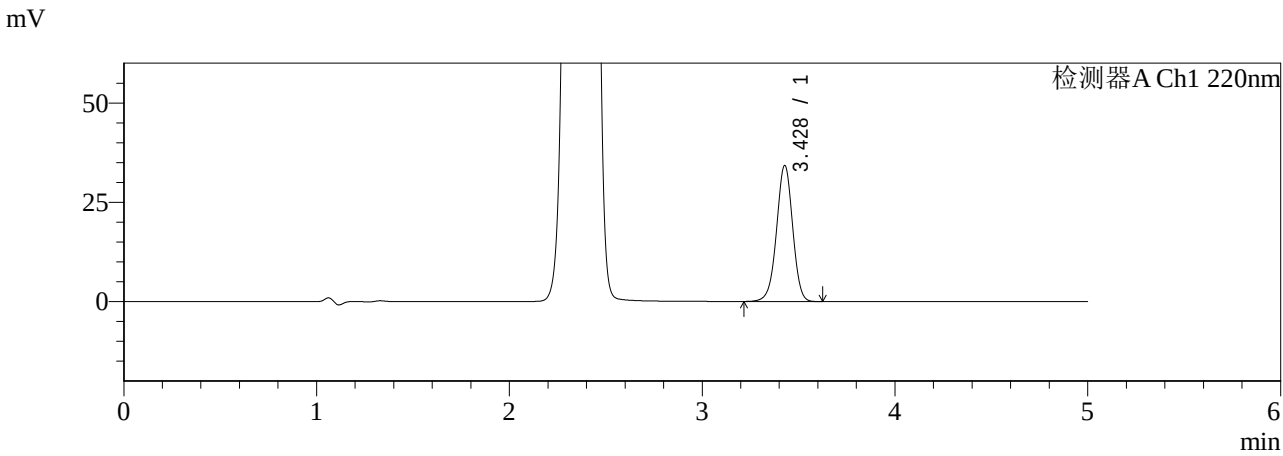

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	196216	100.000	34161	8375	0.977	--
总计		196216	100.000	34161			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	592621	100.000	99626	3637	0.998	--
总计		592621	100.000	99626			

图157 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-180min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-498-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-180min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 01:40:51
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

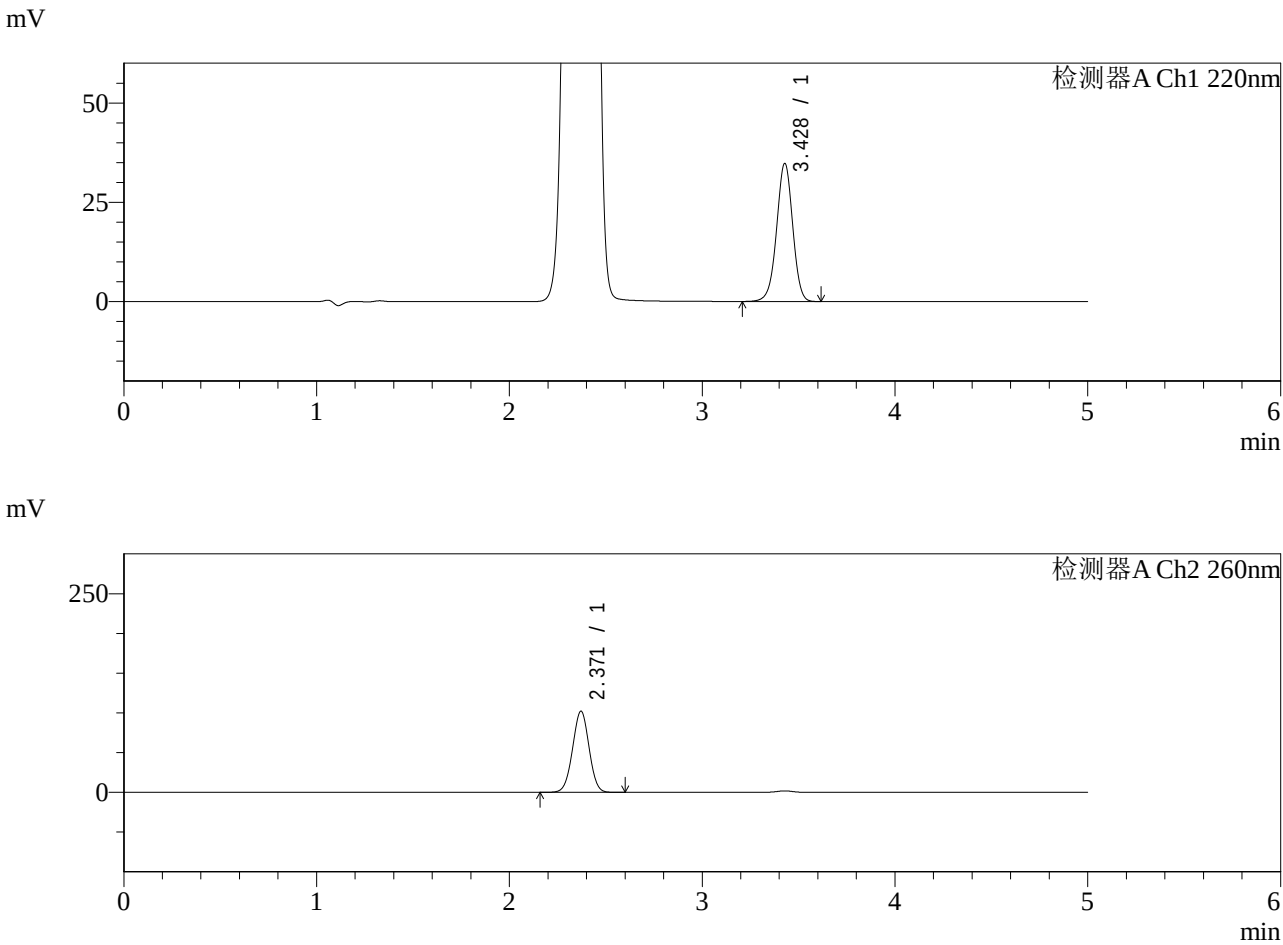

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	199214	100.000	34681	8375	0.977	--
总计		199214	100.000	34681			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	608139	100.000	102203	3635	0.997	--
总计		608139	100.000	102203			

图158 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-180min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-499-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-240min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 01:46:14
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

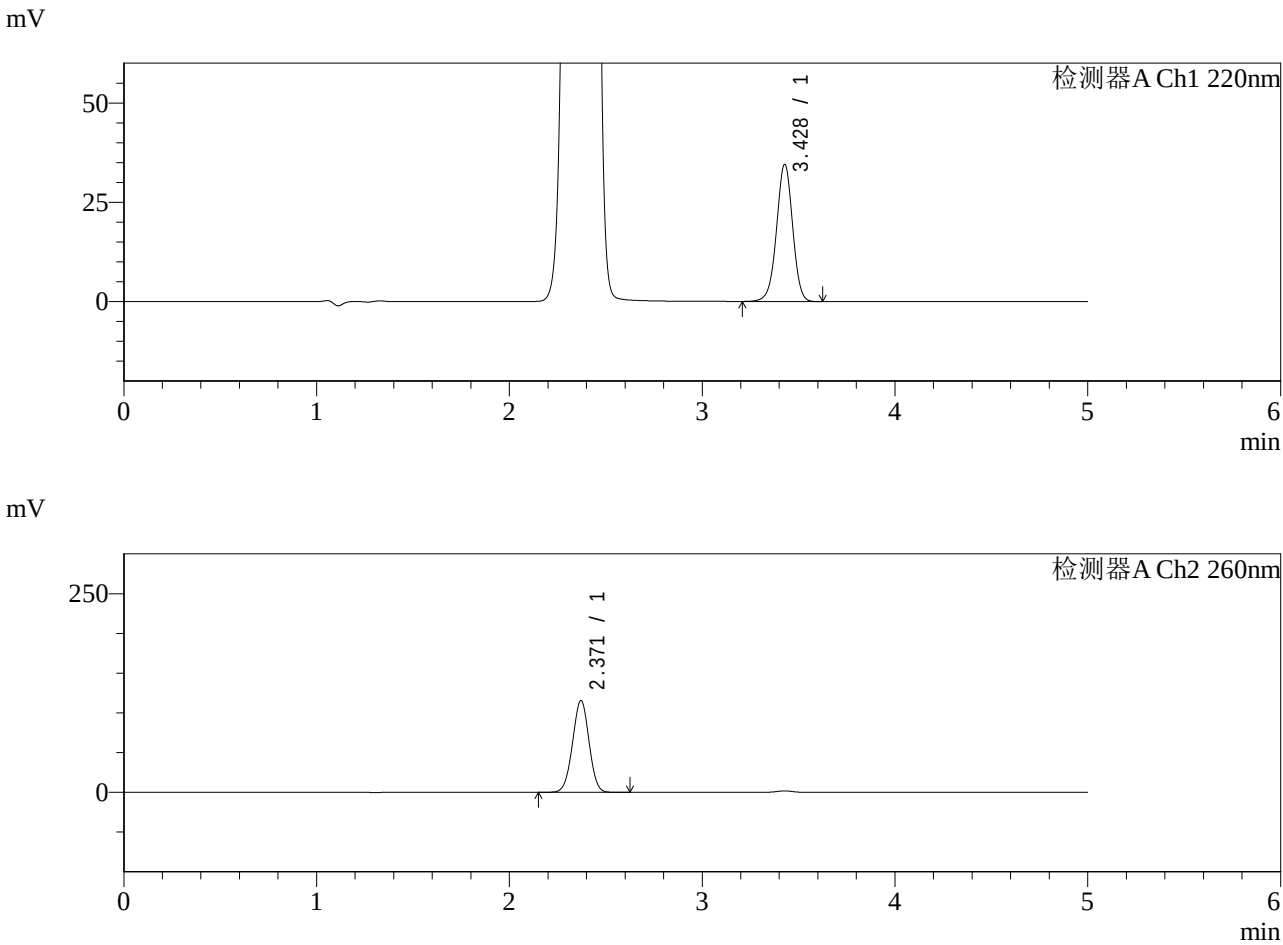

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	198102	100.000	34441	8365	0.978	--
总计		198102	100.000	34441			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	689689	100.000	115666	3620	0.992	--
总计		689689	100.000	115666			

图159 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片1
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-500-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-240min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 01:51:37
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

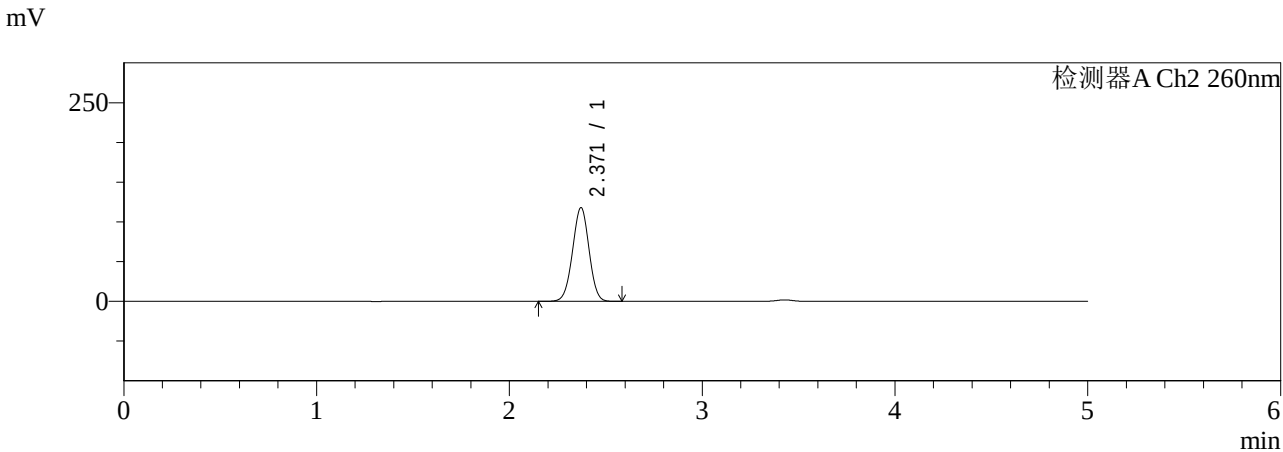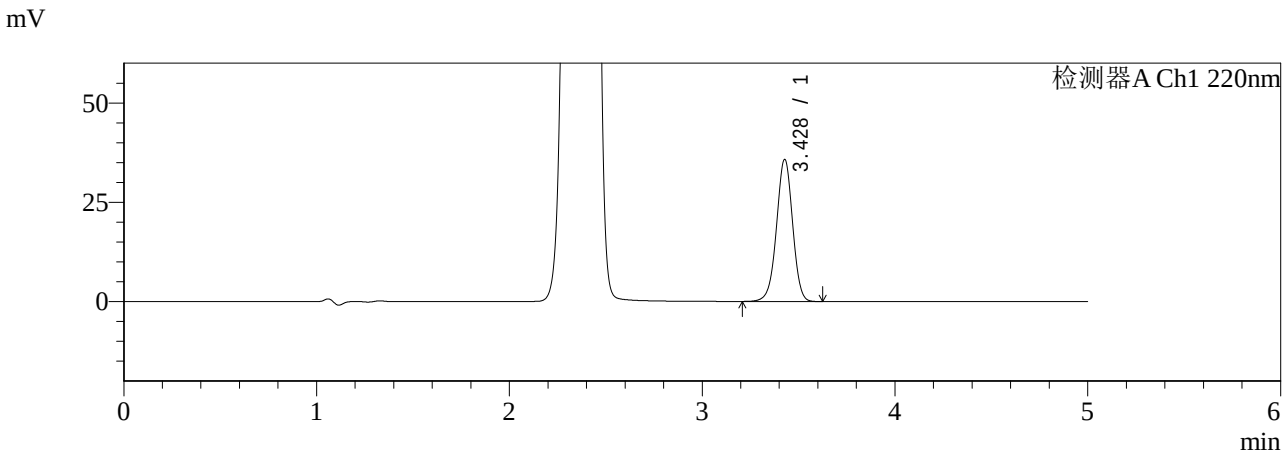

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	204971	100.000	35661	8376	0.978	--
总计		204971	100.000	35661			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	703521	100.000	118030	3623	0.991	--
总计		703521	100.000	118030			

图160 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片2
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-501-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-240min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 01:57:01
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:21:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

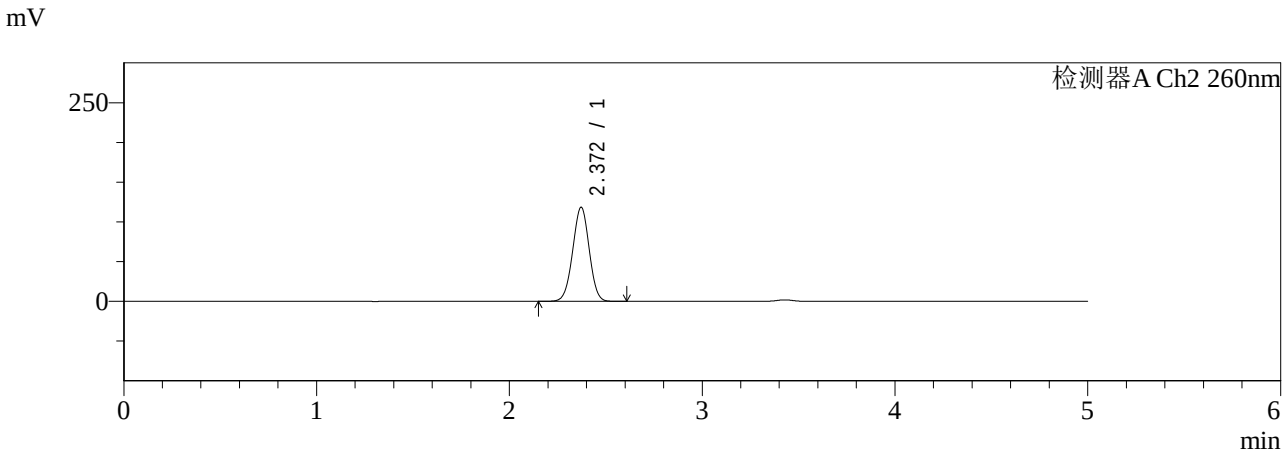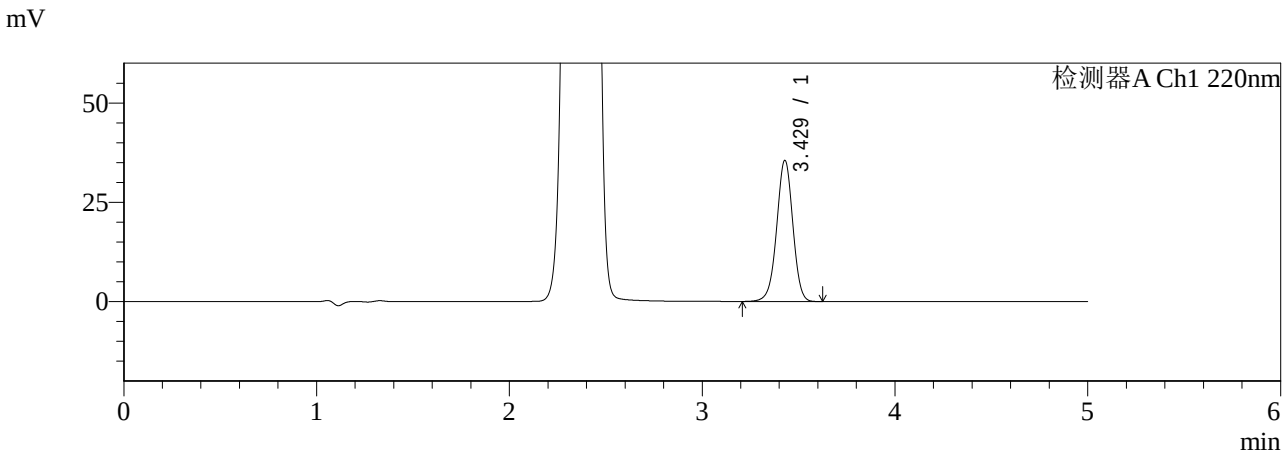

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	203905	100.000	35478	8357	0.979	--
总计		203905	100.000	35478			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	706671	100.000	118484	3619	0.992	--
总计		706671	100.000	118484			

图161 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-502-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-240min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 02:02:23
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

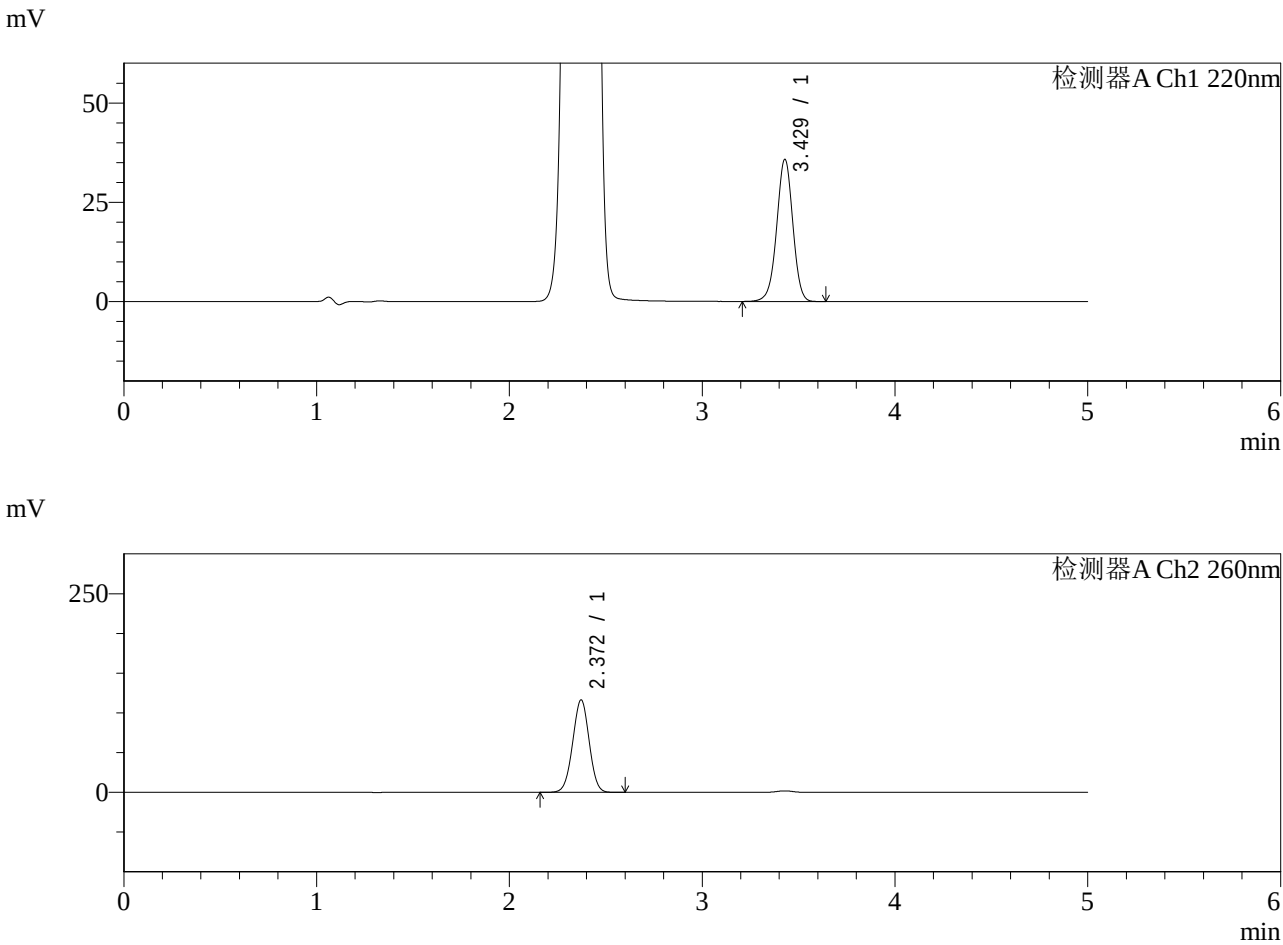

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	205205	100.000	35719	8359	0.978	--
总计		205205	100.000	35719			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	694127	100.000	116469	3620	0.992	--
总计		694127	100.000	116469			

图162 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片4
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-503-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-240min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 02:07:45
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

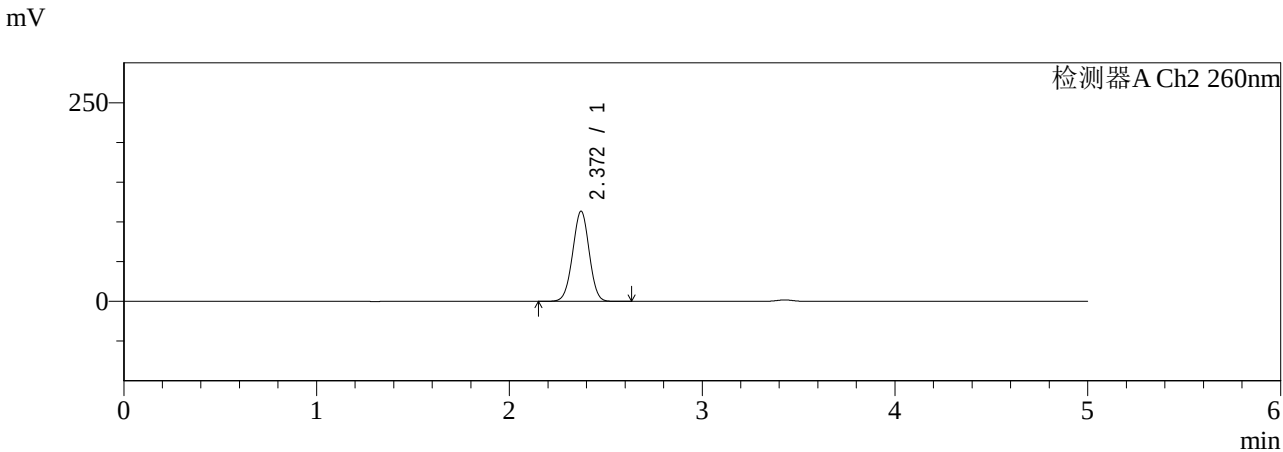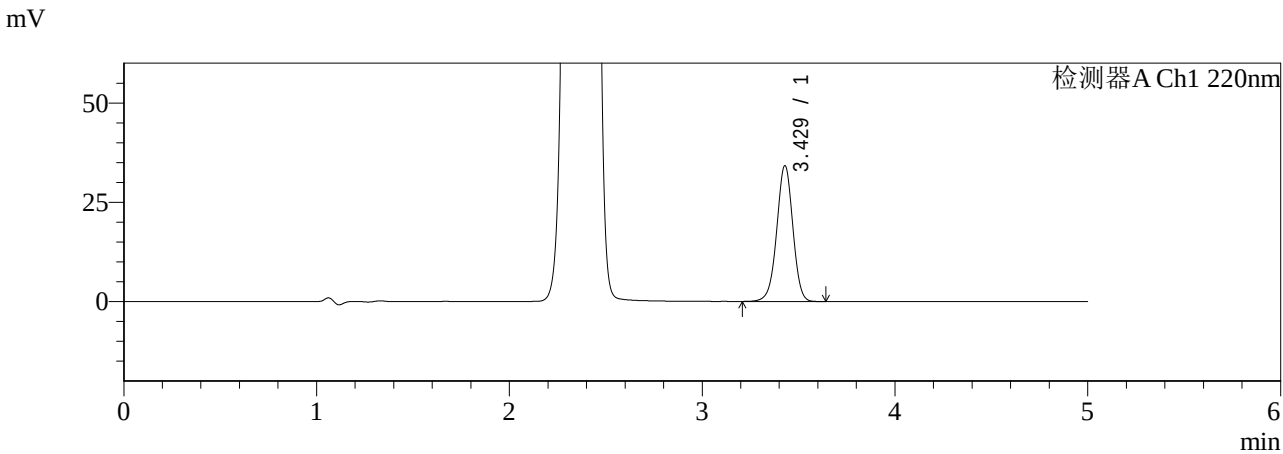

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	196161	100.000	34141	8363	0.978	--
总计		196161	100.000	34141			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	677123	100.000	113530	3617	0.994	--
总计		677123	100.000	113530			

图163 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-504-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-240min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 02:13:08
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

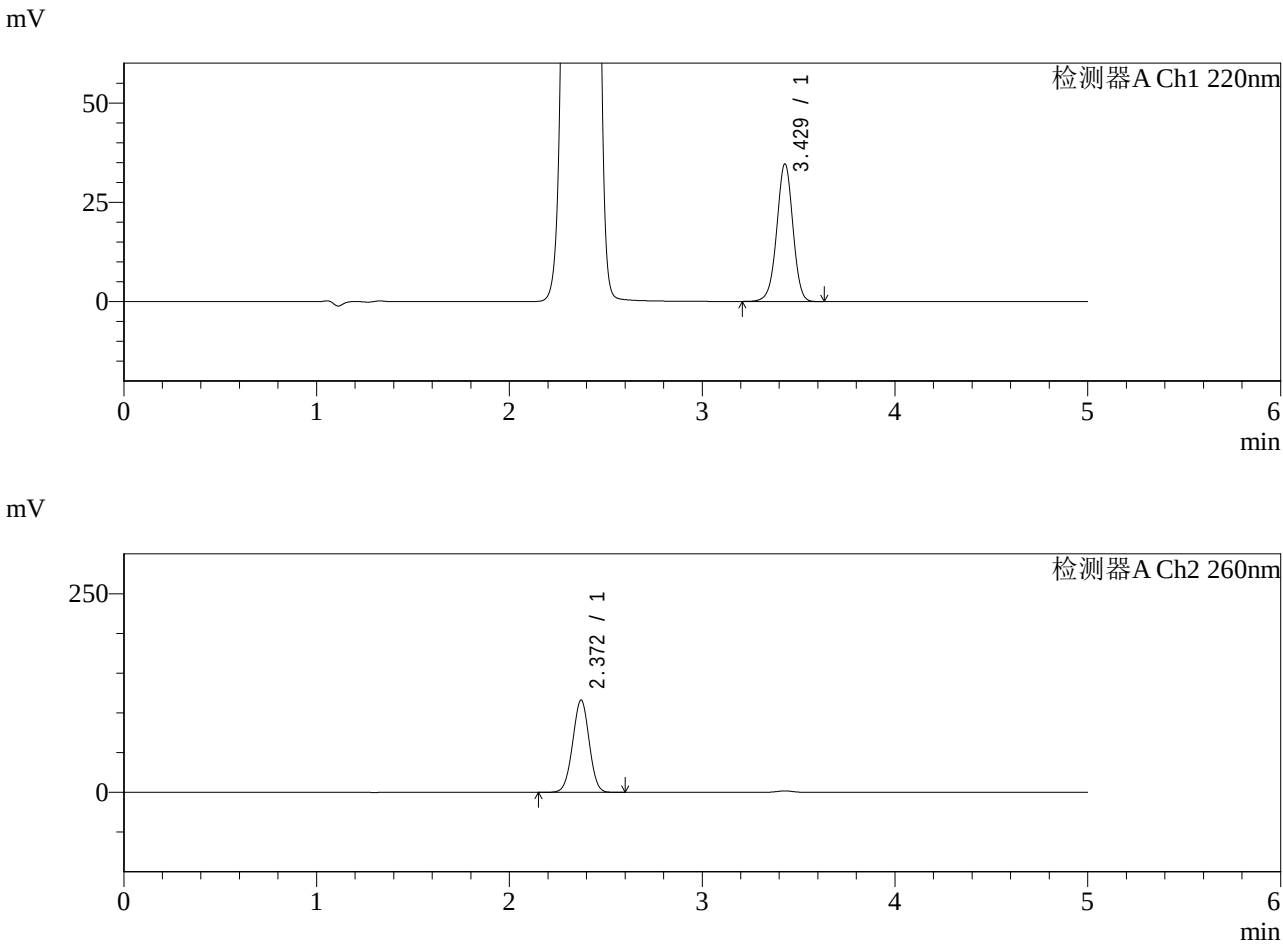

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	198622	100.000	34593	8375	0.978	--
总计		198622	100.000	34593			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	693083	100.000	116172	3614	0.993	--
总计		693083	100.000	116172			

图164 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-505-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-360min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 02:18:31
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

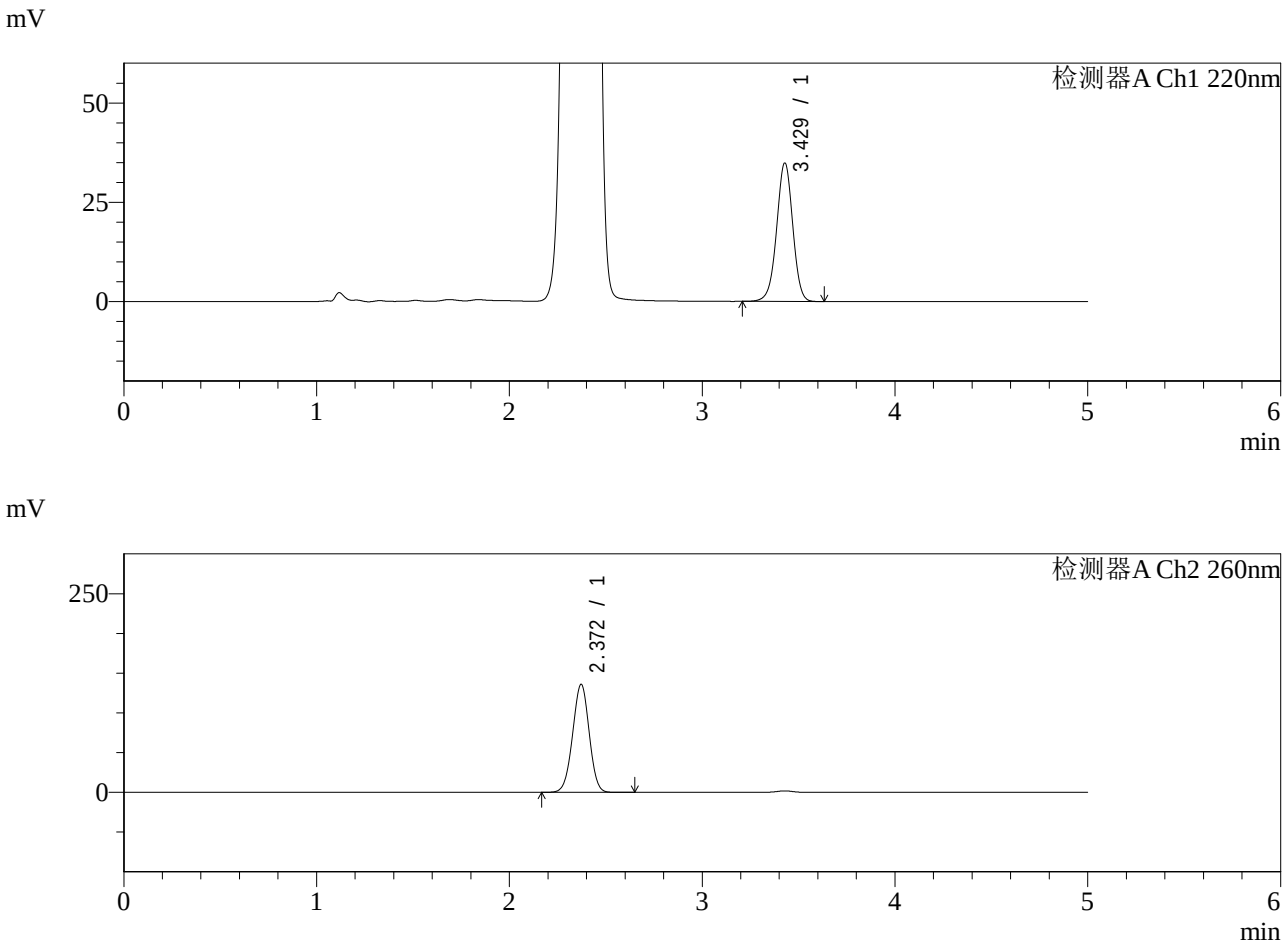

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	199858	100.000	34791	8367	0.978	--
总计		199858	100.000	34791			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	814236	100.000	135990	3593	0.986	--
总计		814236	100.000	135990			

图165 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-506-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-360min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 02:23:54
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

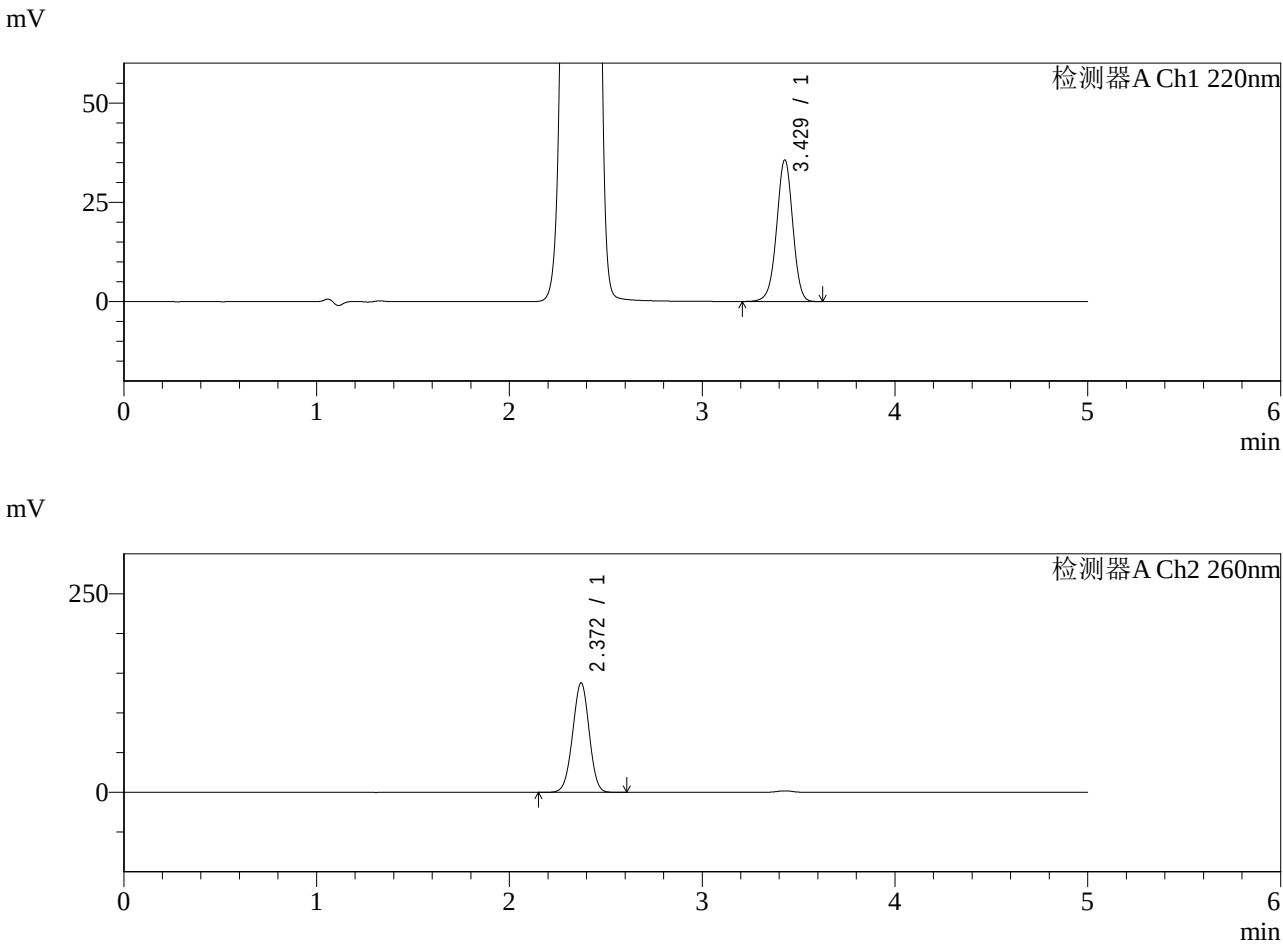

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	204278	100.000	35571	8370	0.977	--
总计		204278	100.000	35571			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	824751	100.000	137824	3595	0.985	--
总计		824751	100.000	137824			

图166 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片2
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-507-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-360min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 02:29:16
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

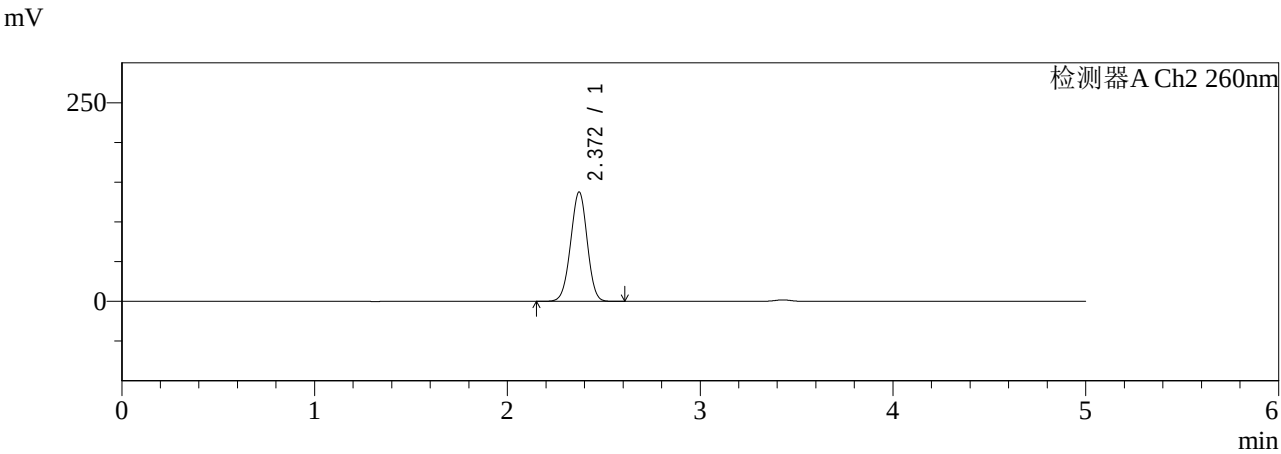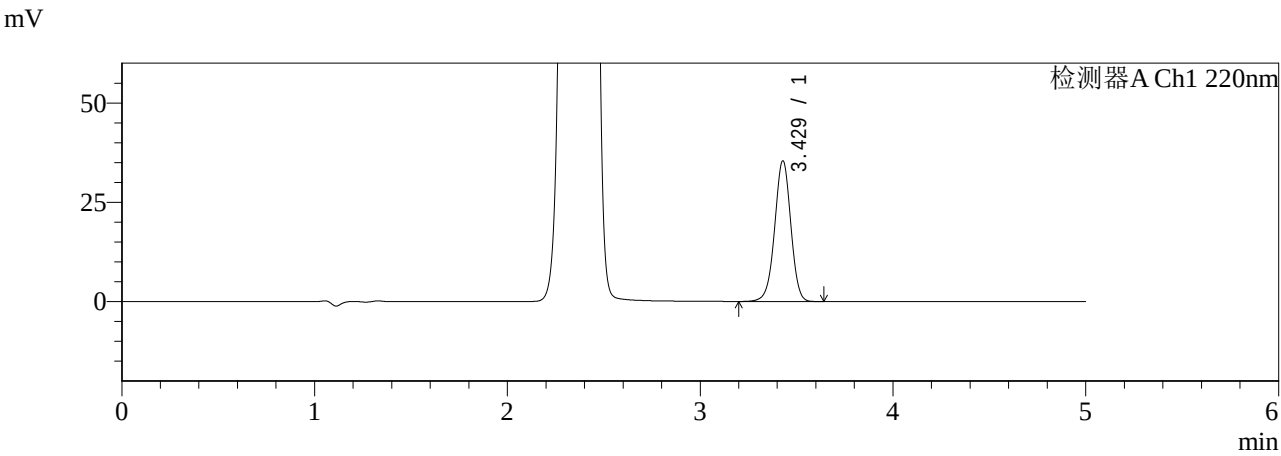

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	203085	100.000	35339	8364	0.978	--
总计		203085	100.000	35339			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	824205	100.000	137685	3594	0.985	--
总计		824205	100.000	137685			

图167 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-508-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-360min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 02:34:39
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

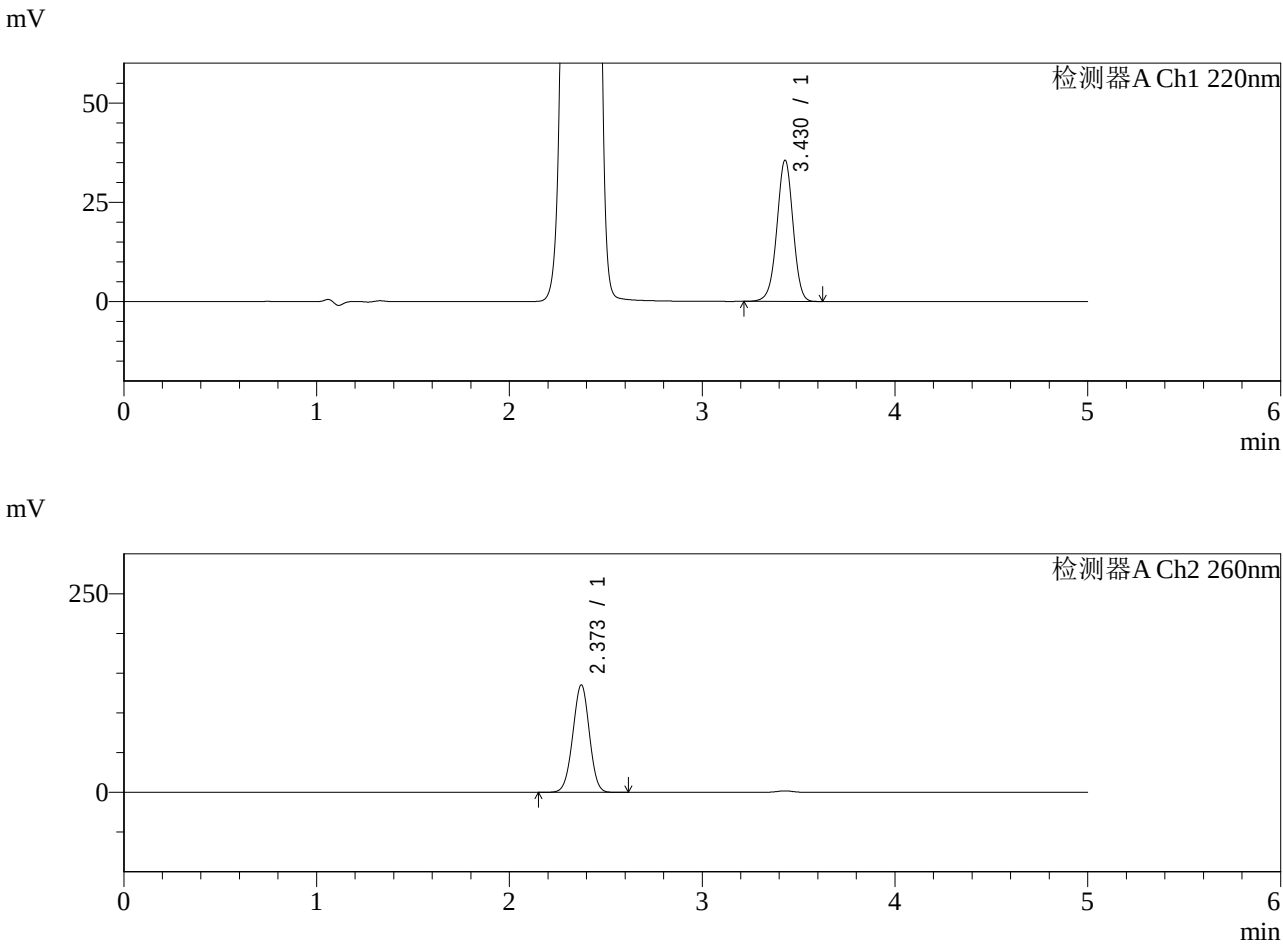

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	203739	100.000	35509	8378	0.978	--
总计		203739	100.000	35509			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	809795	100.000	135259	3600	0.987	--
总计		809795	100.000	135259			

图168 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片4
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-509-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-360min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 02:40:01
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

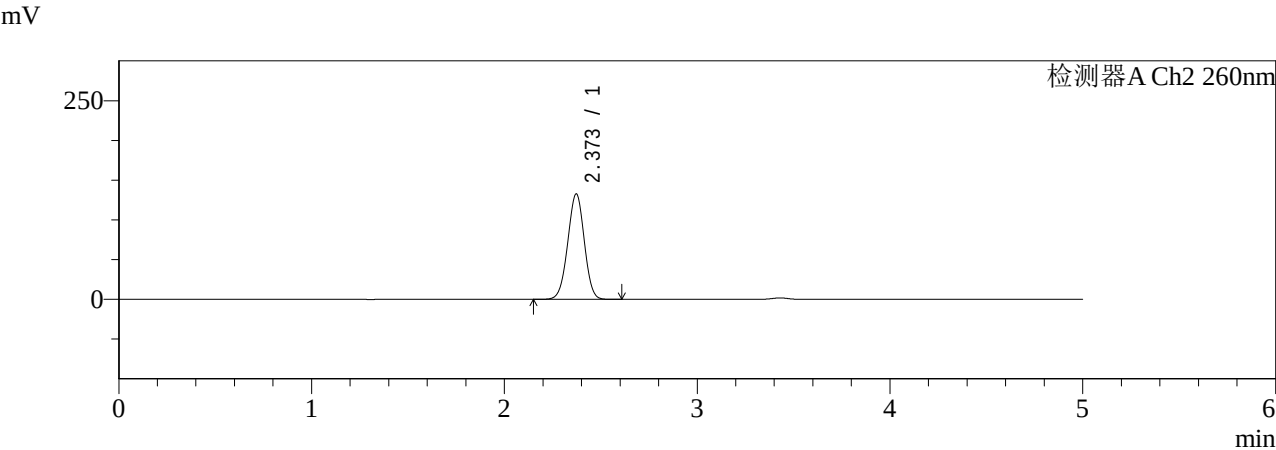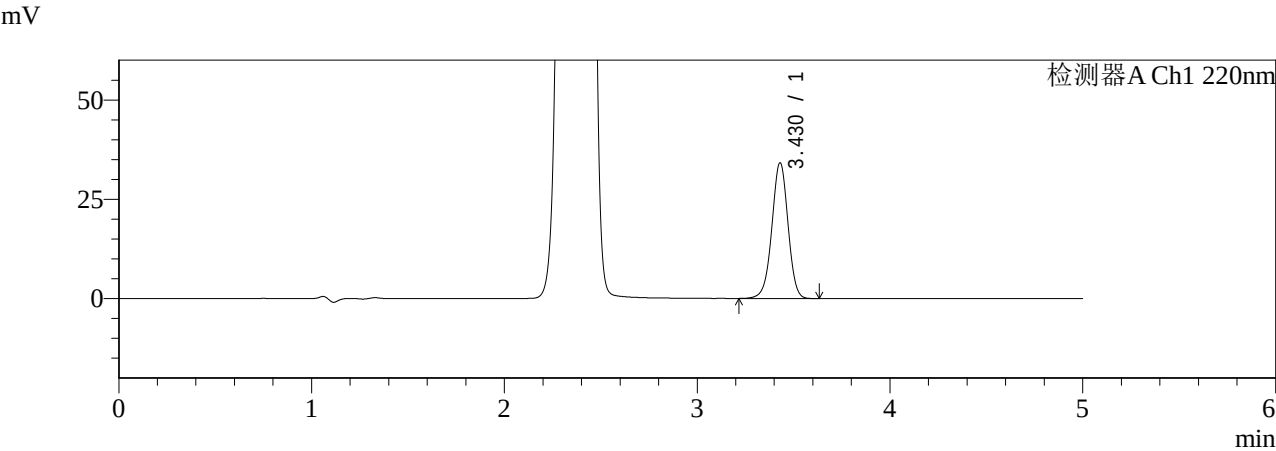

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	195964	100.000	34127	8373	0.978	--
总计		195964	100.000	34127			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	794305	100.000	132765	3600	0.987	--
总计		794305	100.000	132765			

图169 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片5
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-510-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-360min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 02:45:24
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

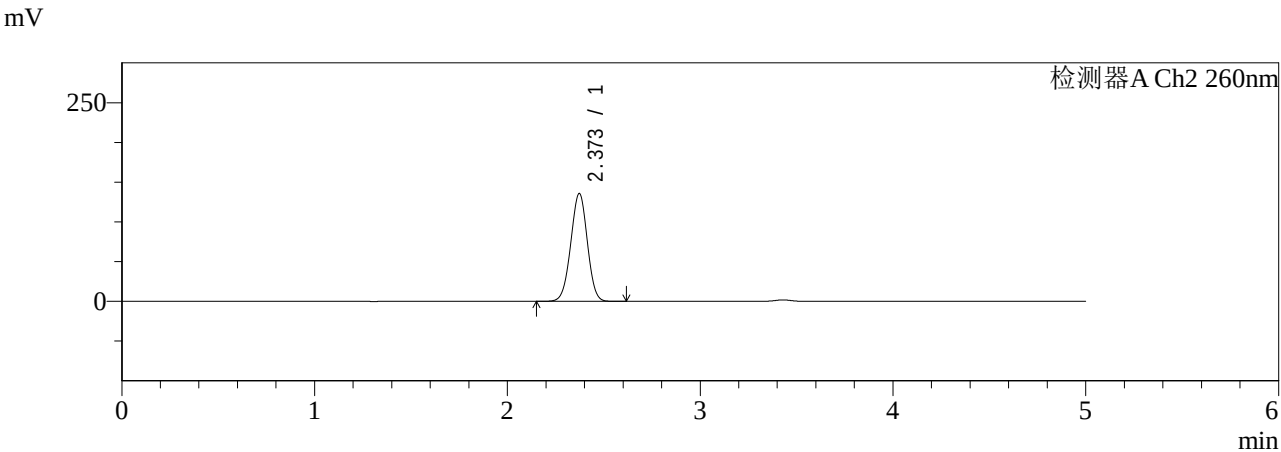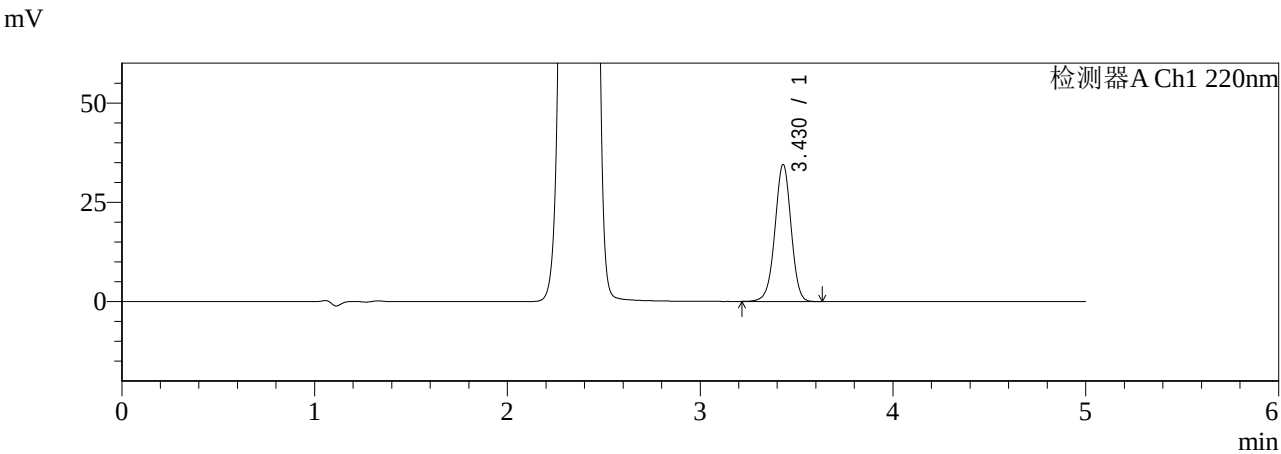

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	197639	100.000	34428	8376	0.978	--
总计		197639	100.000	34428			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	812865	100.000	135770	3598	0.986	--
总计		812865	100.000	135770			

图170 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片6
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-511-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-480min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 02:50:47
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

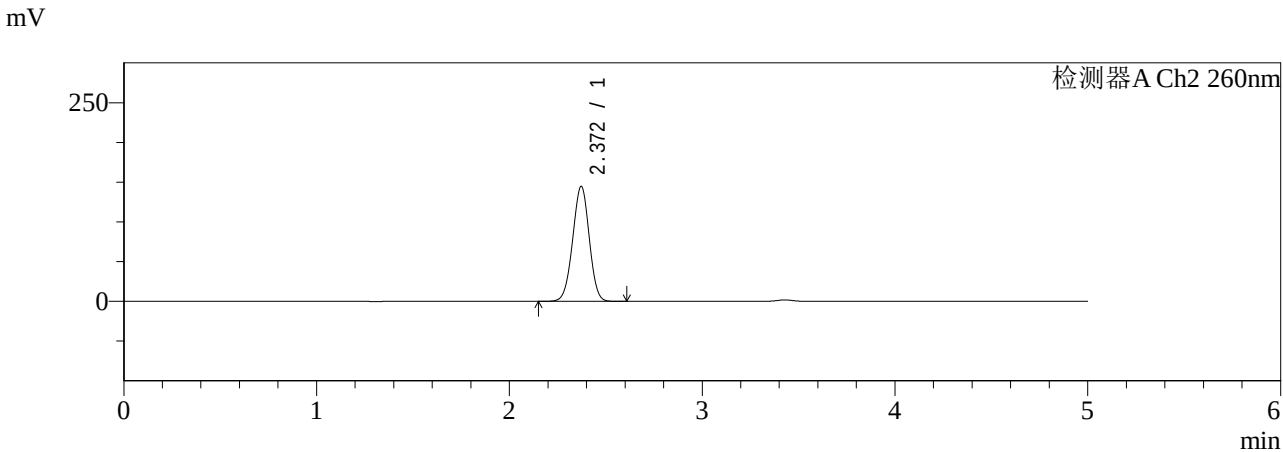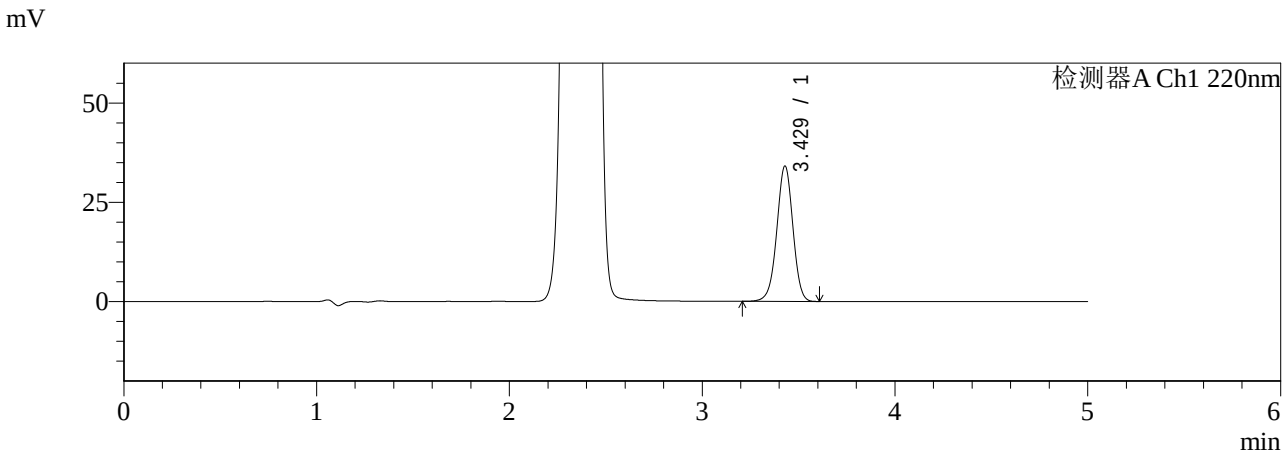

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	195182	100.000	34020	8378	0.978	--
总计		195182	100.000	34020			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	867591	100.000	144840	3589	0.983	--
总计		867591	100.000	144840			

图171 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-512-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-480min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 02:56:10
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

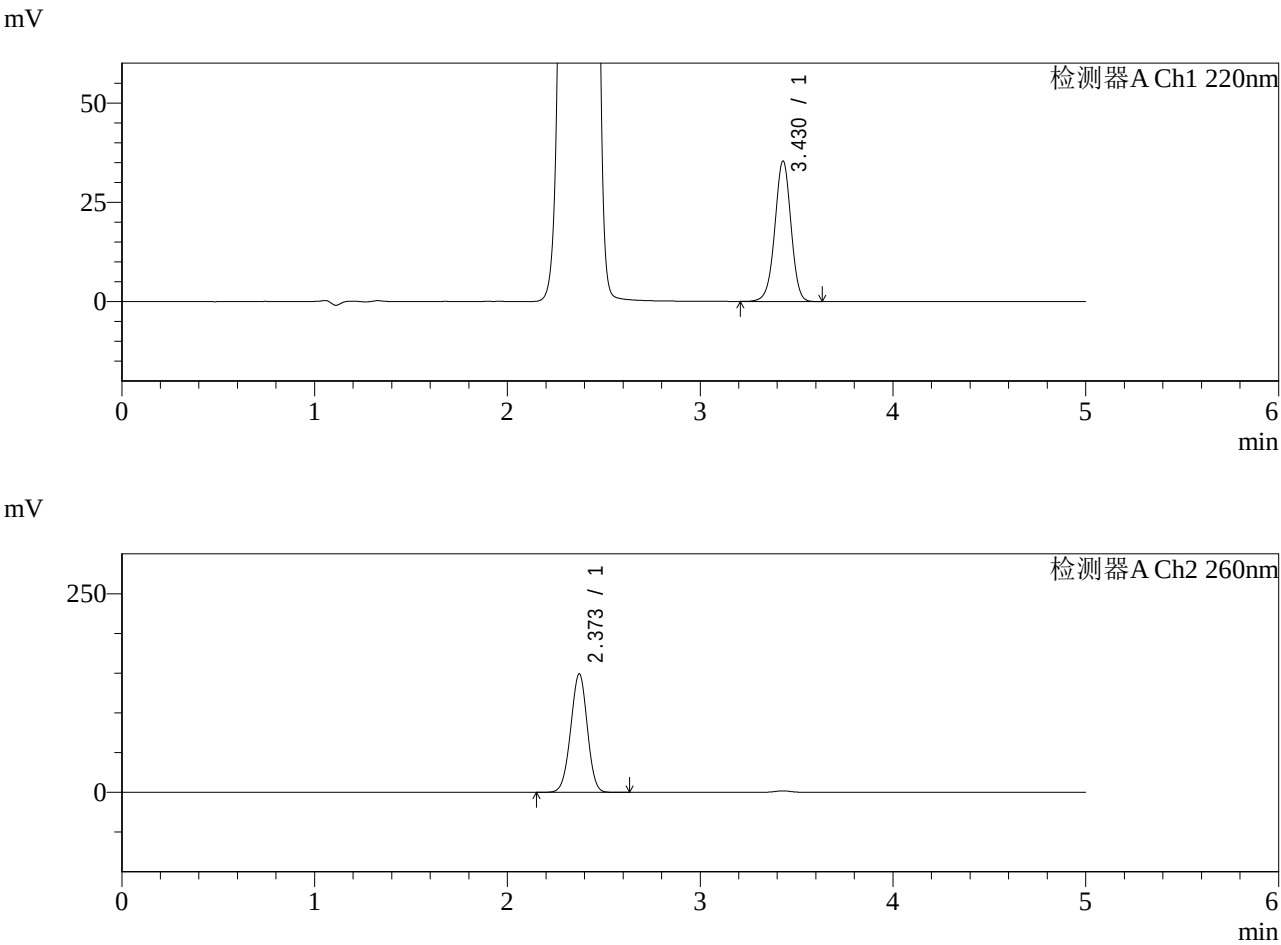

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	202824	100.000	35326	8381	0.978	--
总计		202824	100.000	35326			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	894289	100.000	149140	3585	0.982	--
总计		894289	100.000	149140			

图172 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-513-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-480min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 03:01:33
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

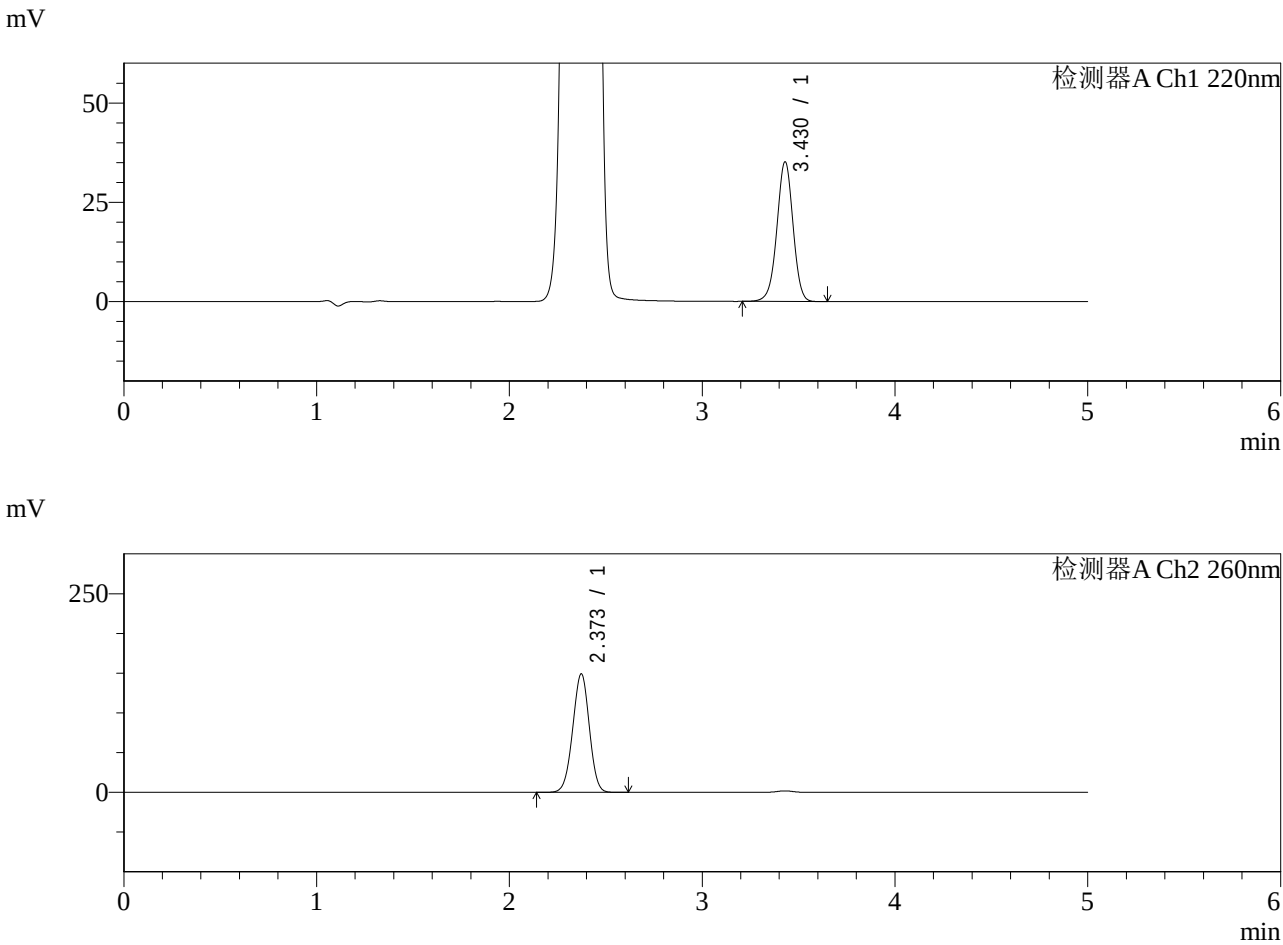

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	201859	100.000	35125	8368	0.979	--
总计		201859	100.000	35125			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	895161	100.000	149169	3583	0.982	--
总计		895161	100.000	149169			

图173 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-514-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-480min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 03:06:56
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

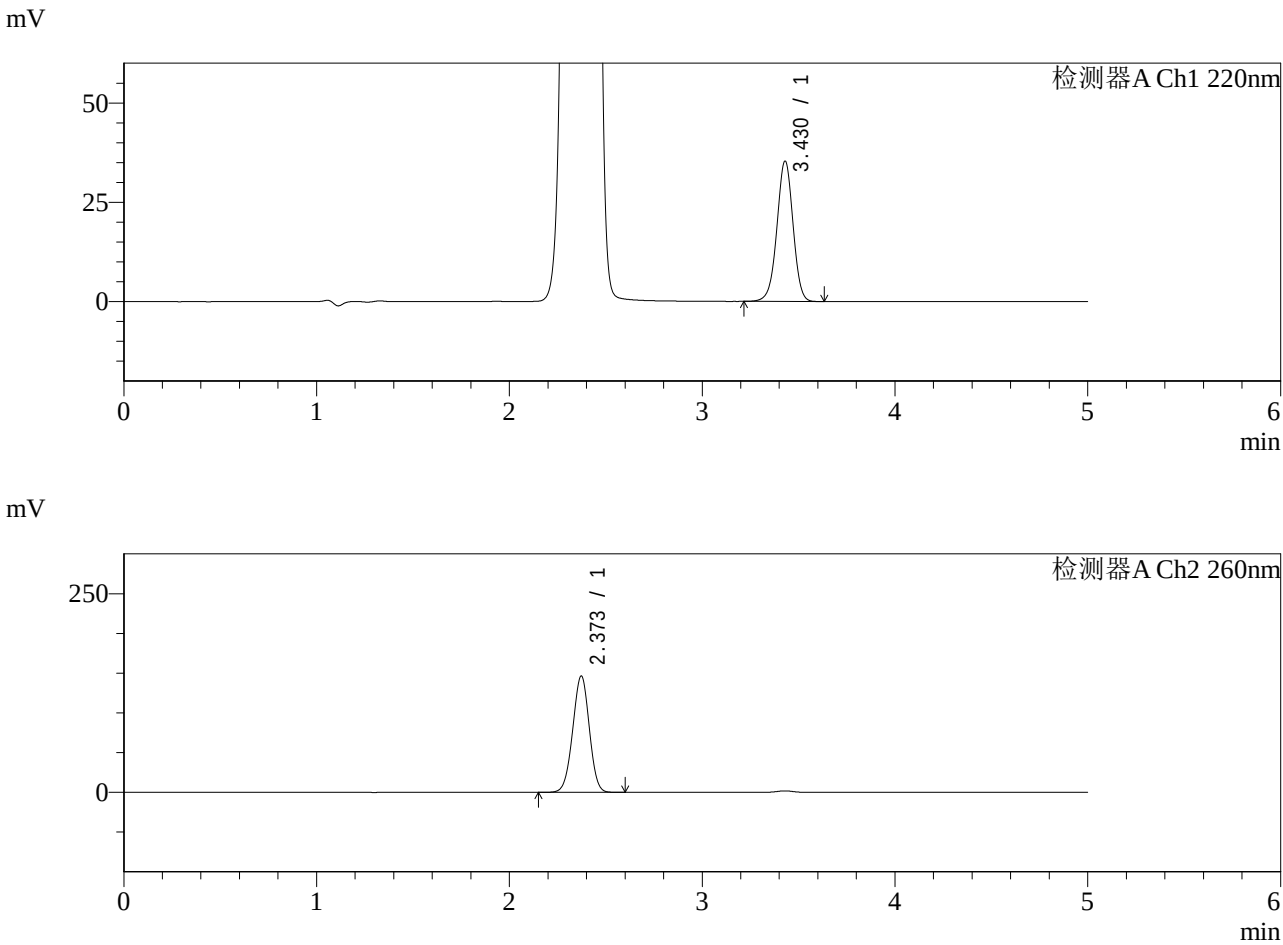

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	202734	100.000	35304	8364	0.979	--
总计		202734	100.000	35304			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	878197	100.000	146458	3583	0.983	--
总计		878197	100.000	146458			

图174 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片4
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-515-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-480min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 03:12:19
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

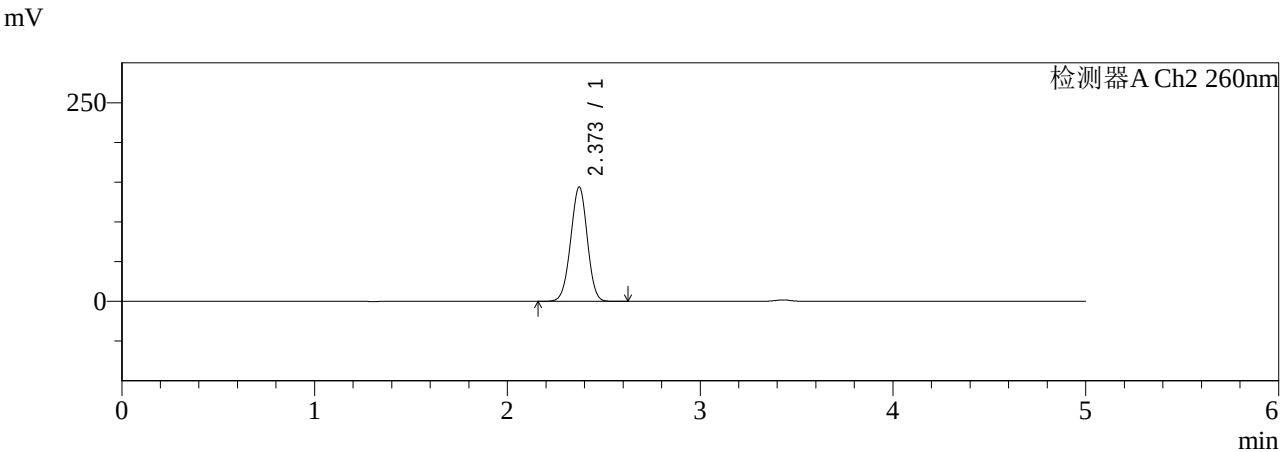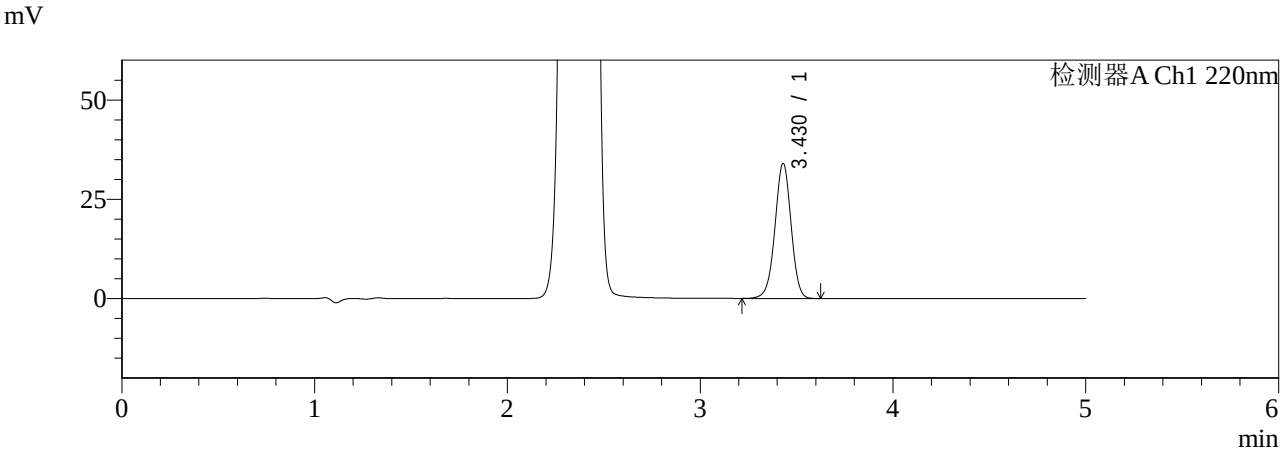

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	194871	100.000	33943	8368	0.979	--
总计		194871	100.000	33943			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	863958	100.000	144020	3582	0.984	--
总计		863958	100.000	144020			

图175 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-516-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-480min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 03:17:41
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

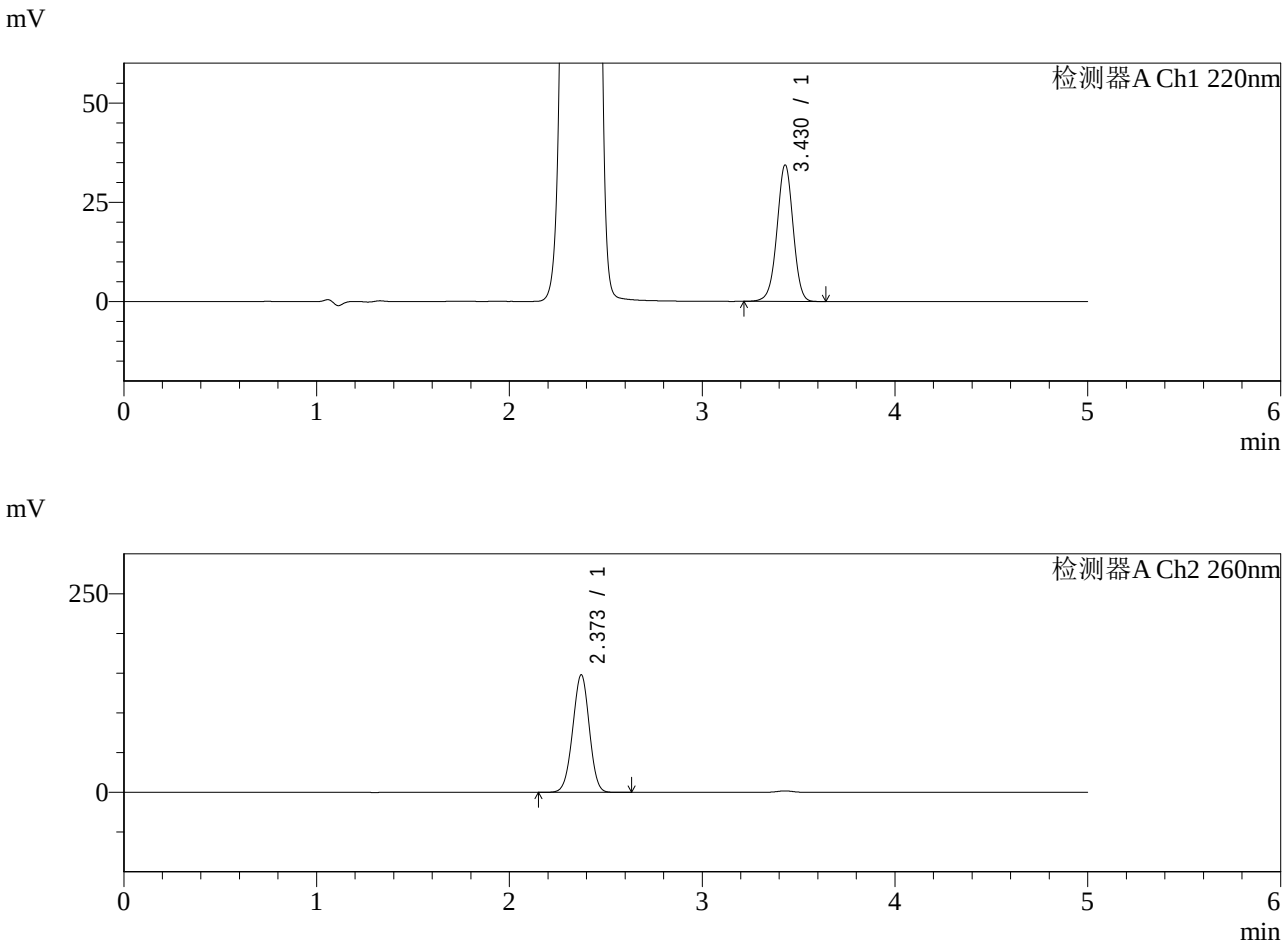

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	197136	100.000	34312	8367	0.980	--
总计		197136	100.000	34312			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	888070	100.000	147950	3577	0.983	--
总计		888070	100.000	147950			

图176 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-517-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-600min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 03:23:05
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

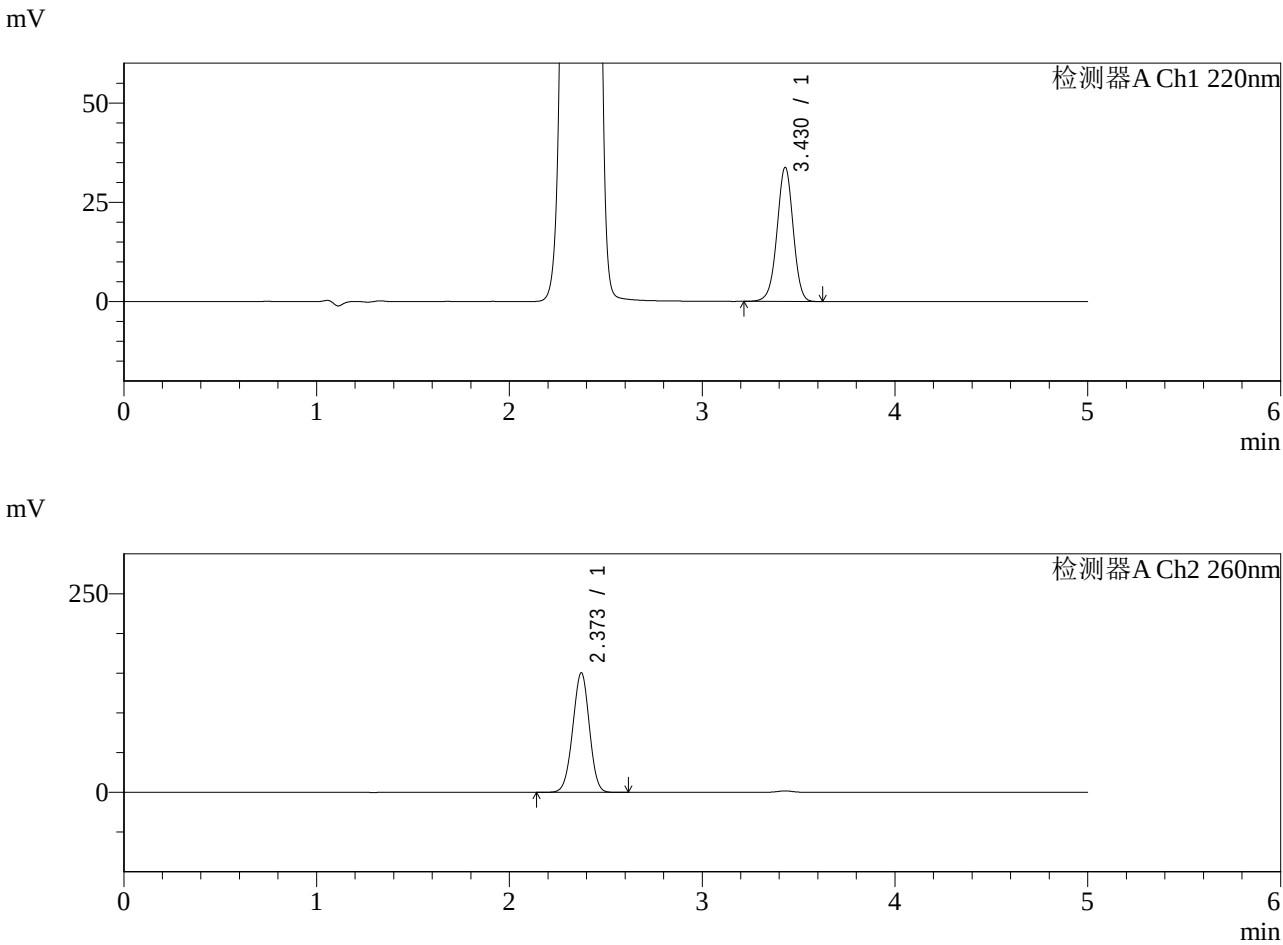

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	193574	100.000	33716	8352	0.979	--
总计		193574	100.000	33716			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	902990	100.000	150512	3586	0.981	--
总计		902990	100.000	150512			

图177 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片1
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-518-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-600min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 03:28:29
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

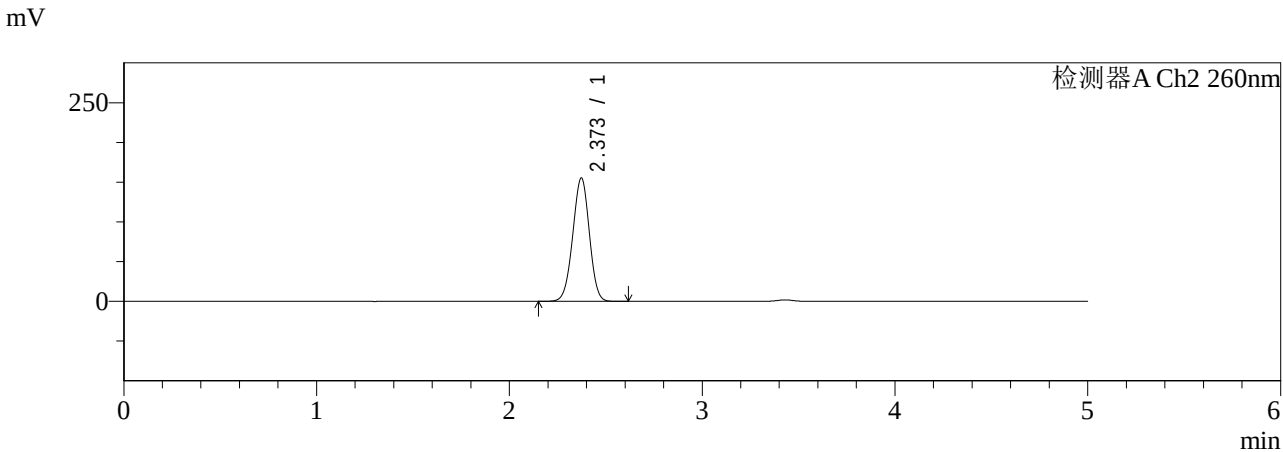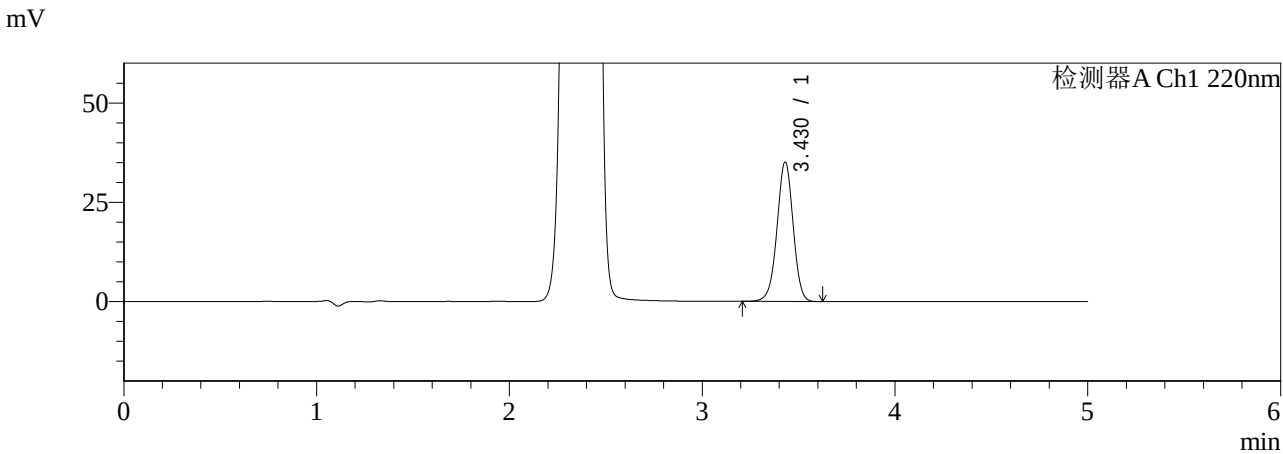

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	201292	100.000	35063	8366	0.979	--
总计		201292	100.000	35063			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	931950	100.000	155216	3581	0.980	--
总计		931950	100.000	155216			

图178 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片2
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-519-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-600min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 03:33:52
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

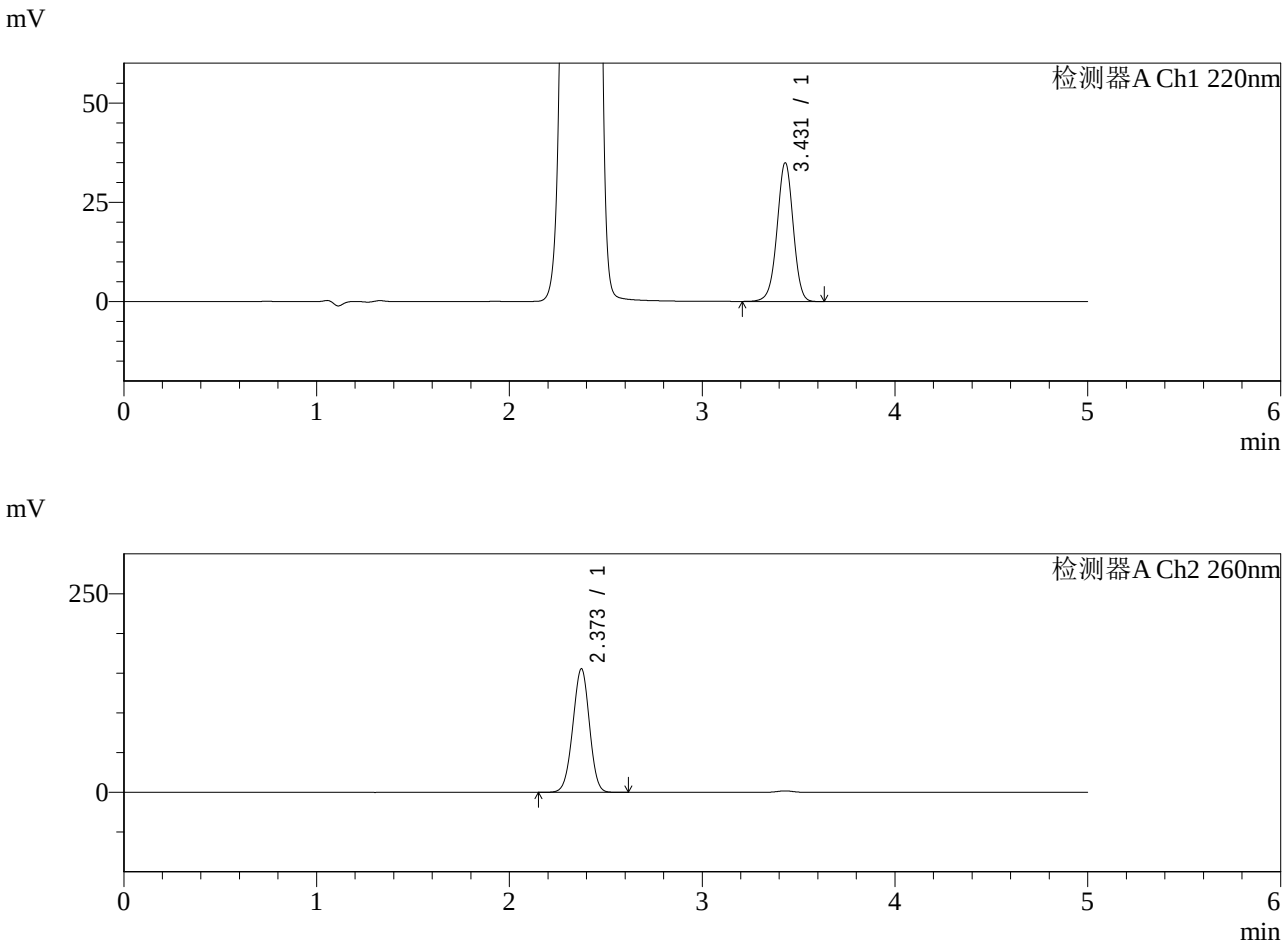

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	200359	100.000	34888	8370	0.978	--
总计		200359	100.000	34888			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	933853	100.000	155465	3580	0.980	--
总计		933853	100.000	155465			

图179 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片3
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-520-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-600min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 03:39:16
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

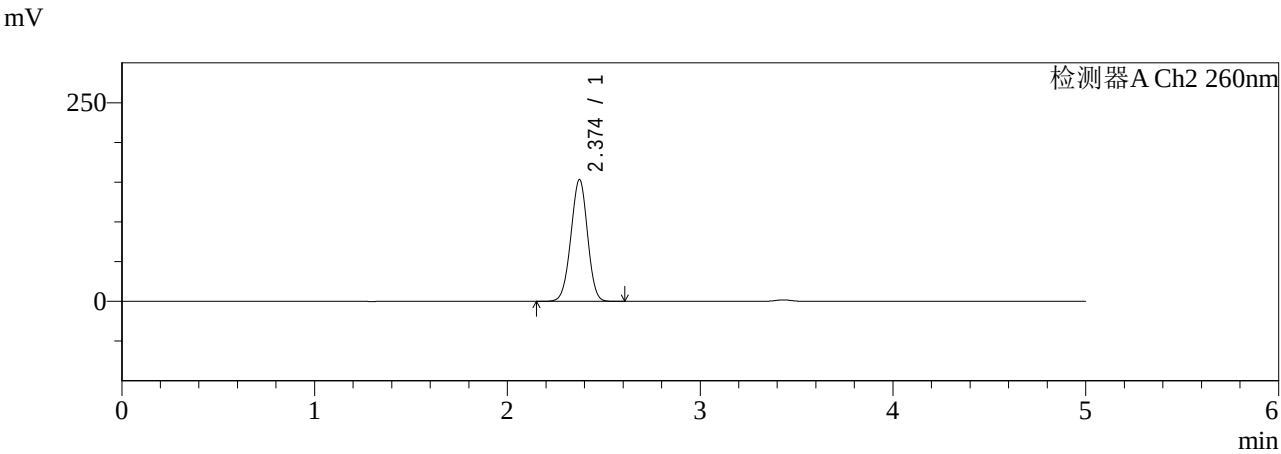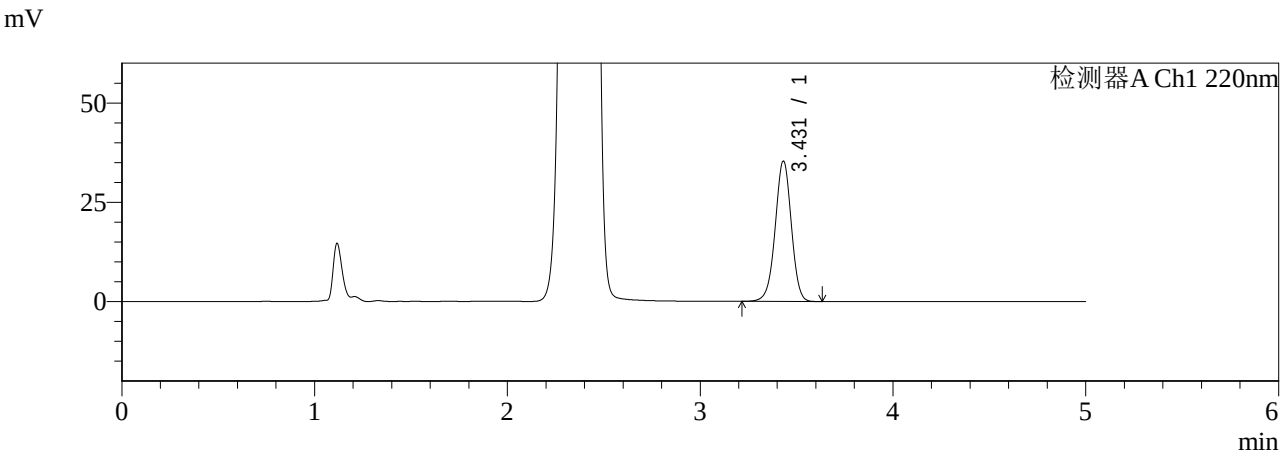

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	202643	100.000	35280	8384	0.980	--
总计		202643	100.000	35280			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	919903	100.000	153119	3582	0.981	--
总计		919903	100.000	153119			

图180 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片4
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-521-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-600min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 03:44:39
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

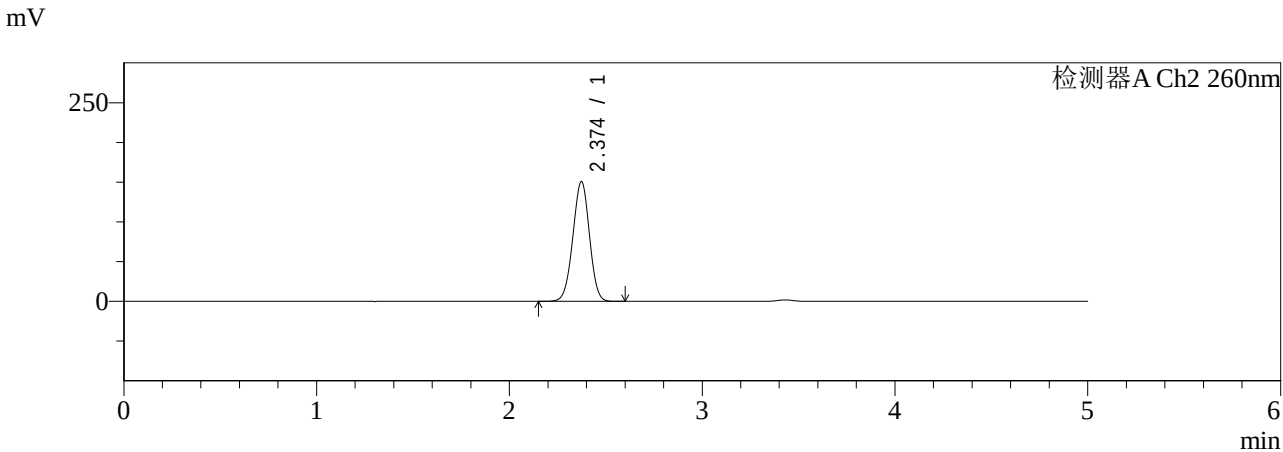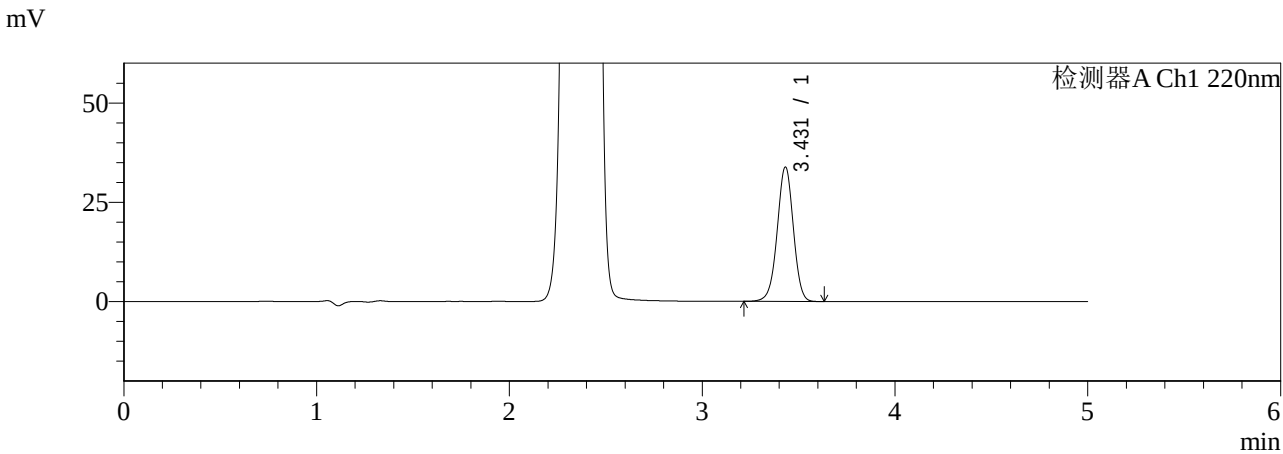

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	194142	100.000	33791	8381	0.980	--
总计		194142	100.000	33791			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	904775	100.000	150635	3582	0.982	--
总计		904775	100.000	150635			

图181 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片5
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-522-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-600min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 03:50:02
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

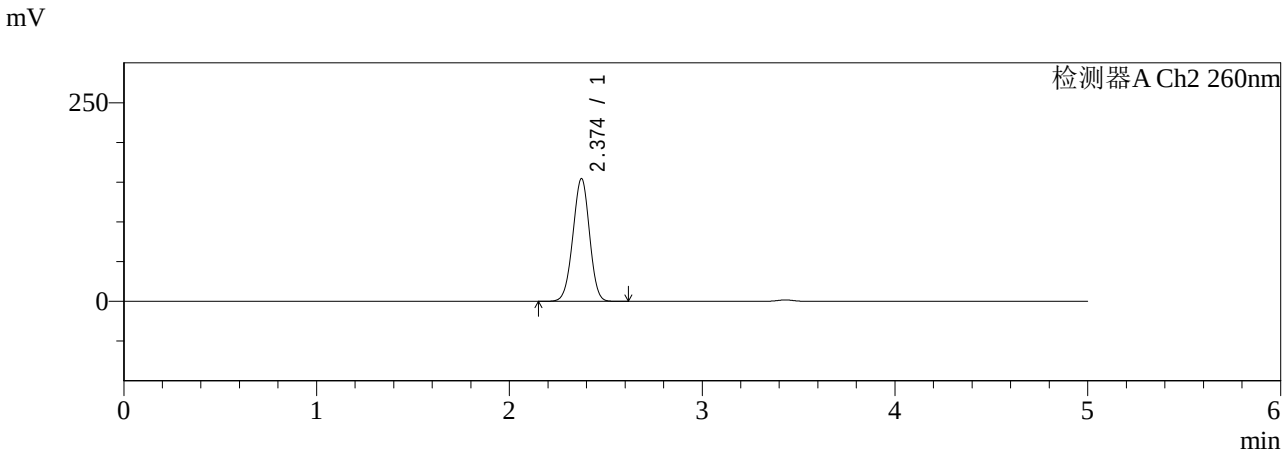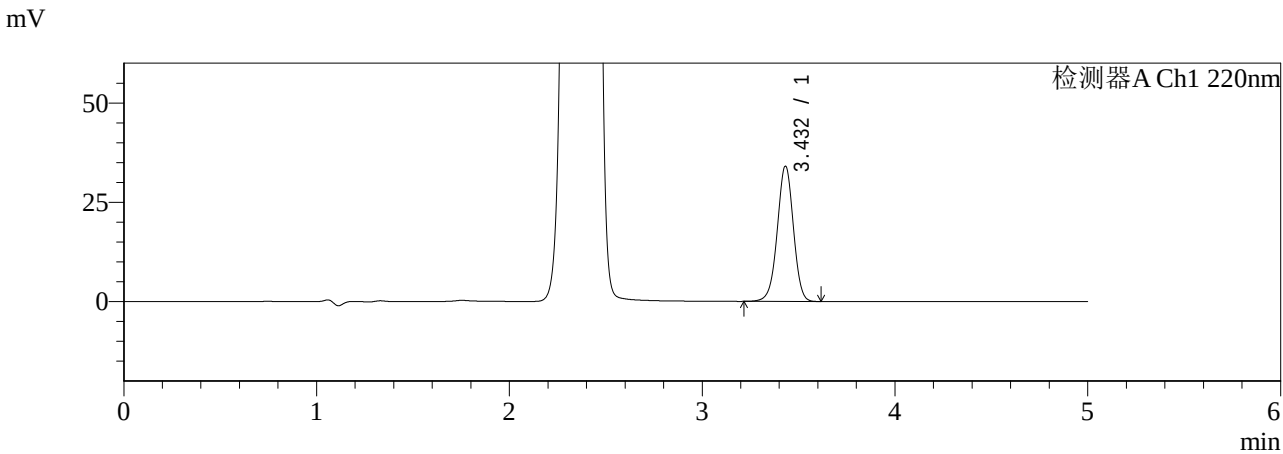

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	195386	100.000	33998	8373	0.980	--
总计		195386	100.000	33998			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	927743	100.000	154354	3578	0.981	--
总计		927743	100.000	154354			

图182 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-523-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-720min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 03:55:25
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:22:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

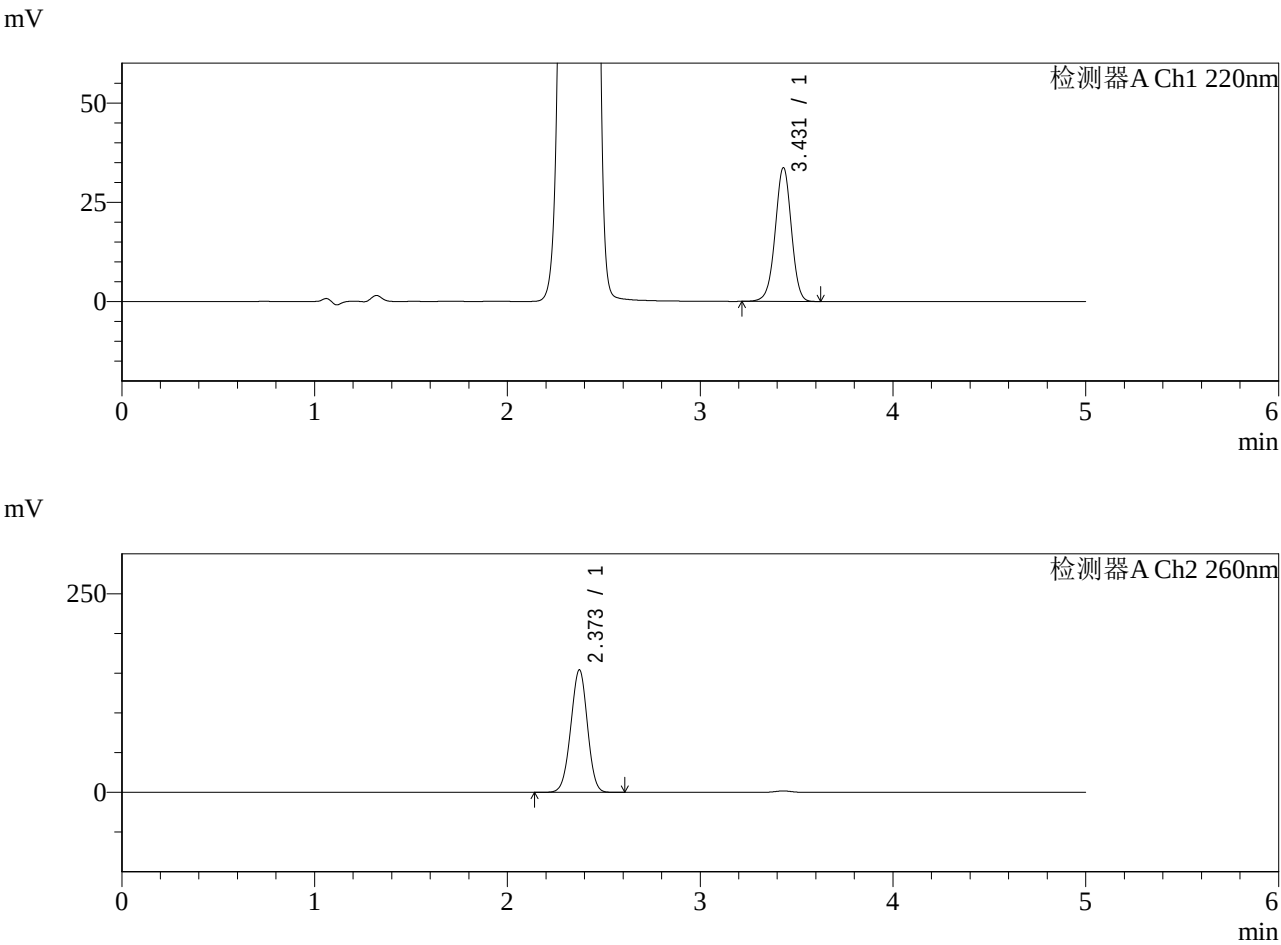

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	193336	100.000	33627	8370	0.980	--
总计		193336	100.000	33627			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	925715	100.000	154144	3580	0.981	--
总计		925715	100.000	154144			

图183 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-524-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-720min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 04:00:48
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:23:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

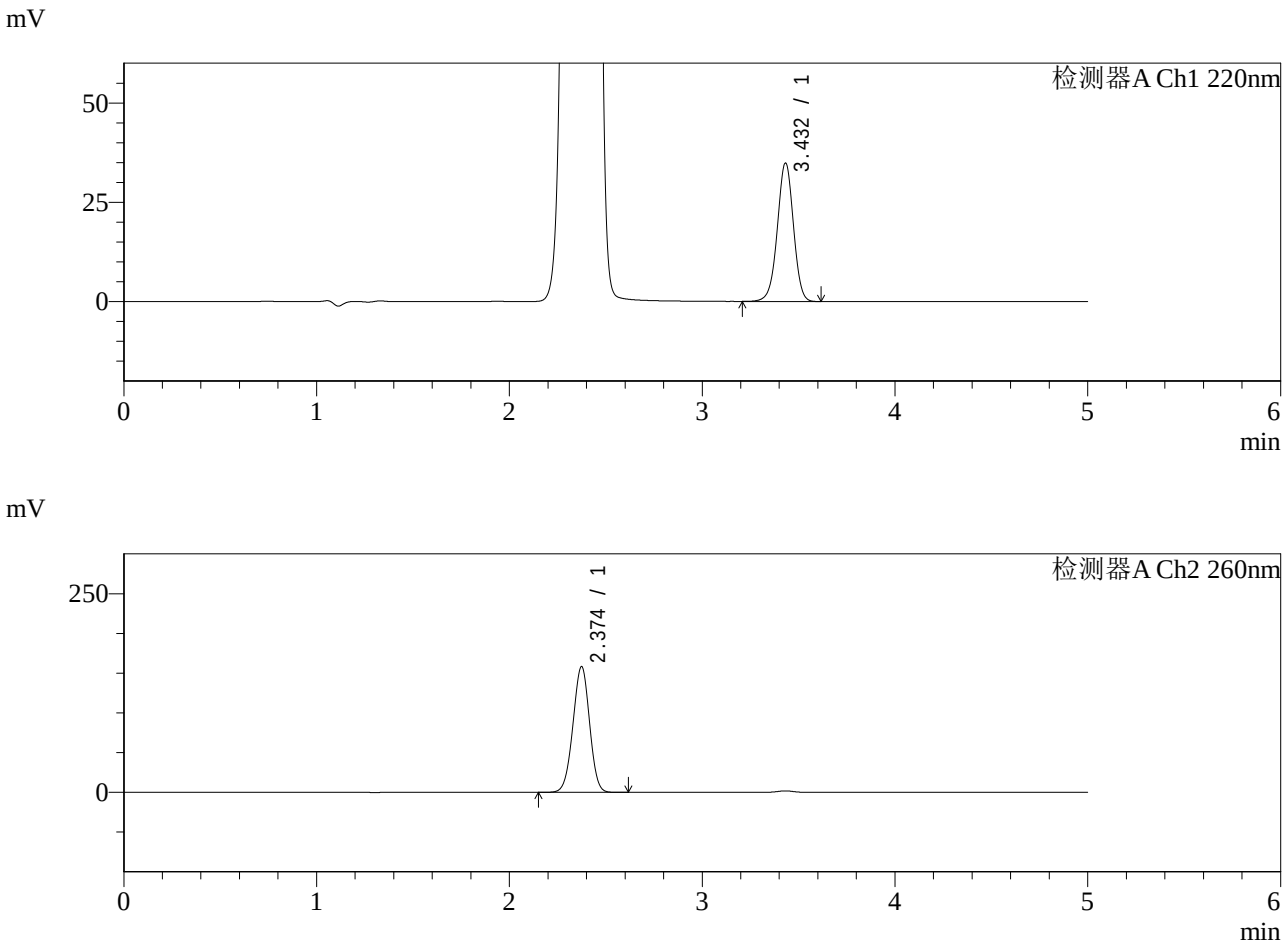

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	200161	100.000	34789	8361	0.980	--
总计		200161	100.000	34789			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	950608	100.000	158022	3578	0.979	--
总计		950608	100.000	158022			

图184 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片2
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-525-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-720min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 04:06:11
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:23:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

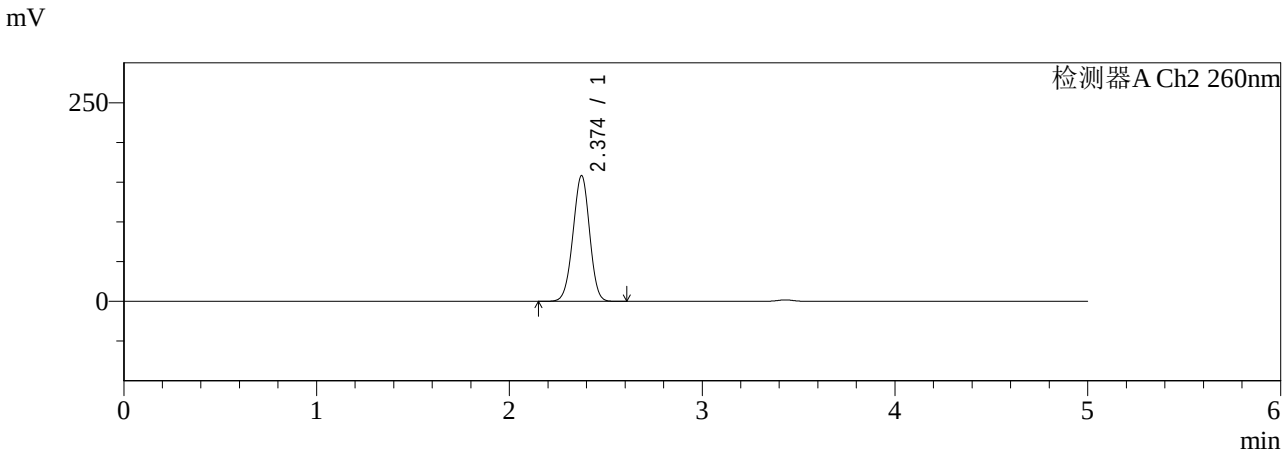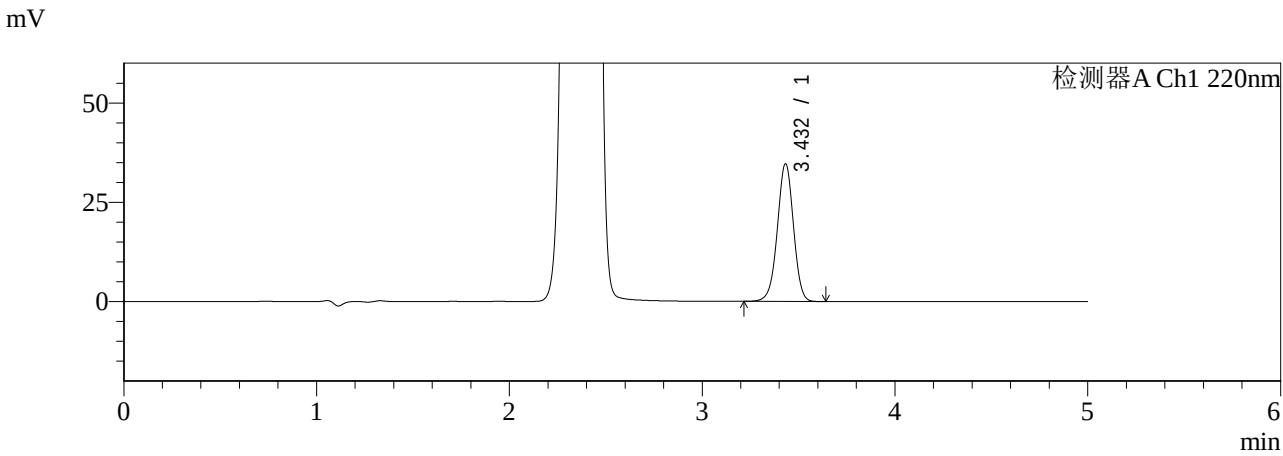

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	198958	100.000	34583	8375	0.979	--
总计		198958	100.000	34583			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	949869	100.000	157961	3582	0.979	--
总计		949869	100.000	157961			

图185 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-526-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-720min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 04:11:34
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:23:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

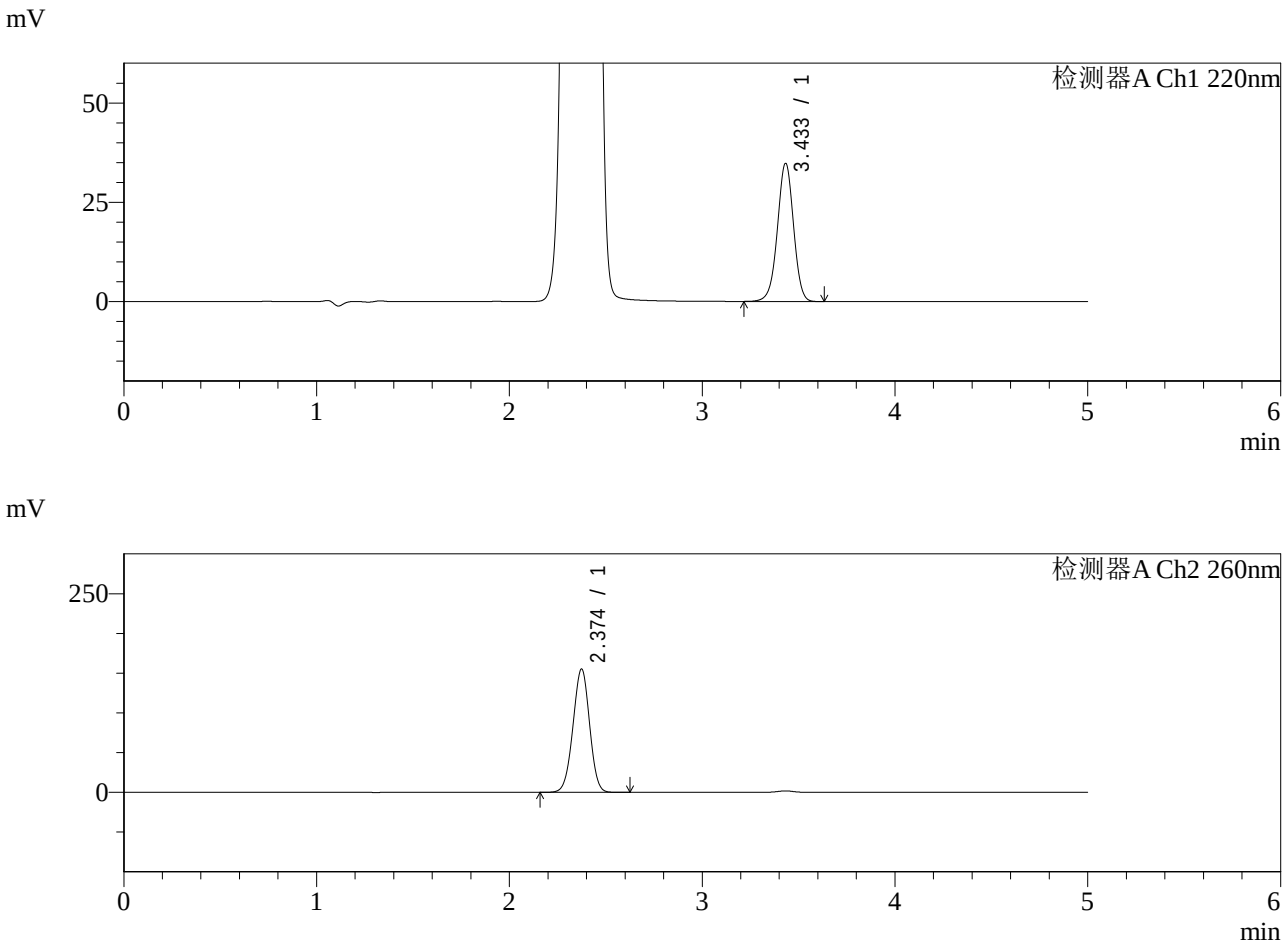

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	199658	100.000	34671	8371	0.979	--
总计		199658	100.000	34671			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	931769	100.000	154951	3583	0.981	--
总计		931769	100.000	154951			

图186 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片4
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-527-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-720min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 04:16:57
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:23:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

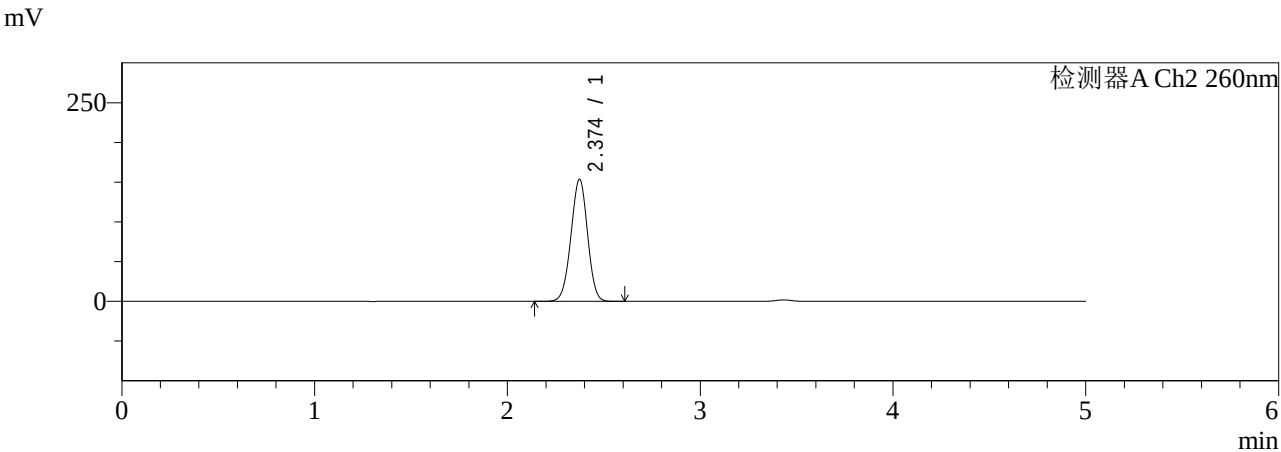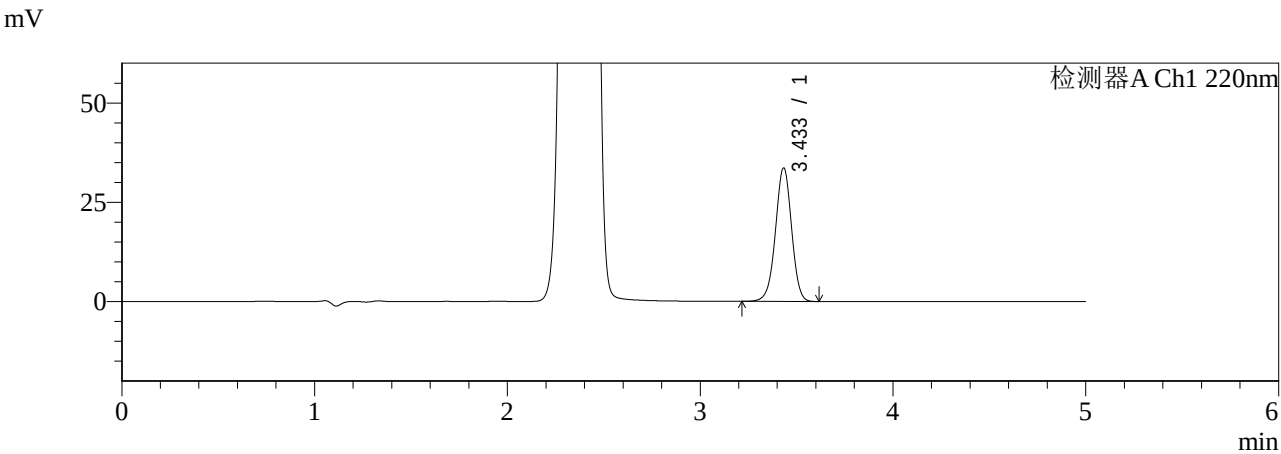

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	193045	100.000	33506	8370	0.980	--
总计		193045	100.000	33506			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	922461	100.000	153381	3578	0.982	--
总计		922461	100.000	153381			

图187 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片5
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-528-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-720min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 04:22:20
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:23:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

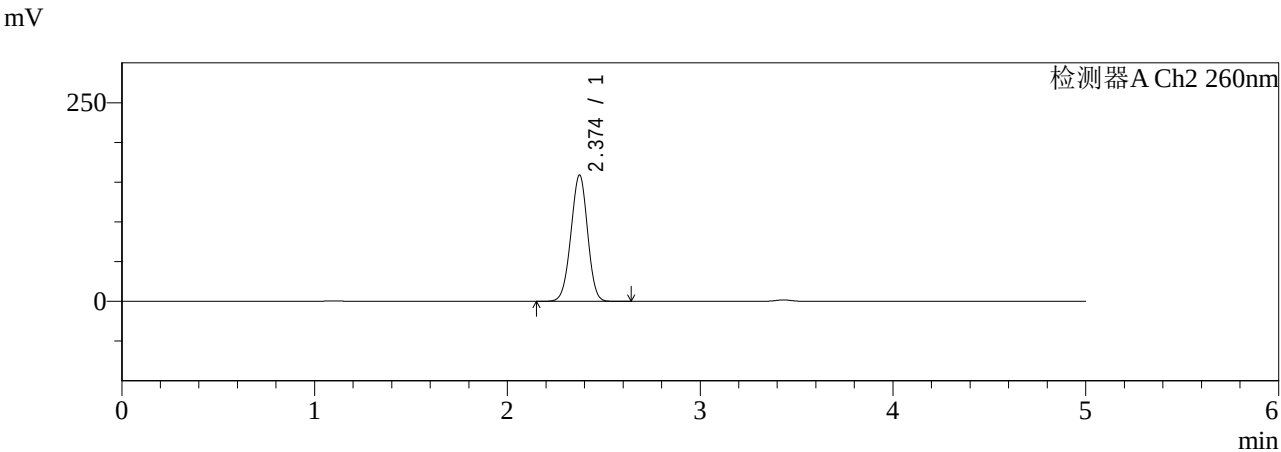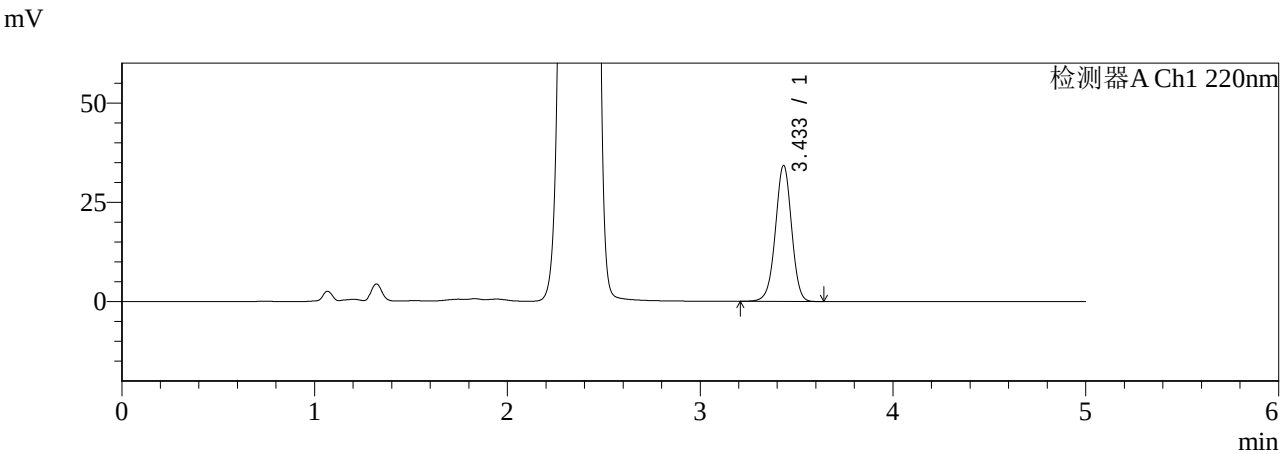

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	196632	100.000	34131	8369	0.981	--
总计		196632	100.000	34131			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	955675	100.000	158733	3572	0.980	--
总计		955675	100.000	158733			

图188 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-529-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 04:27:44
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:23:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

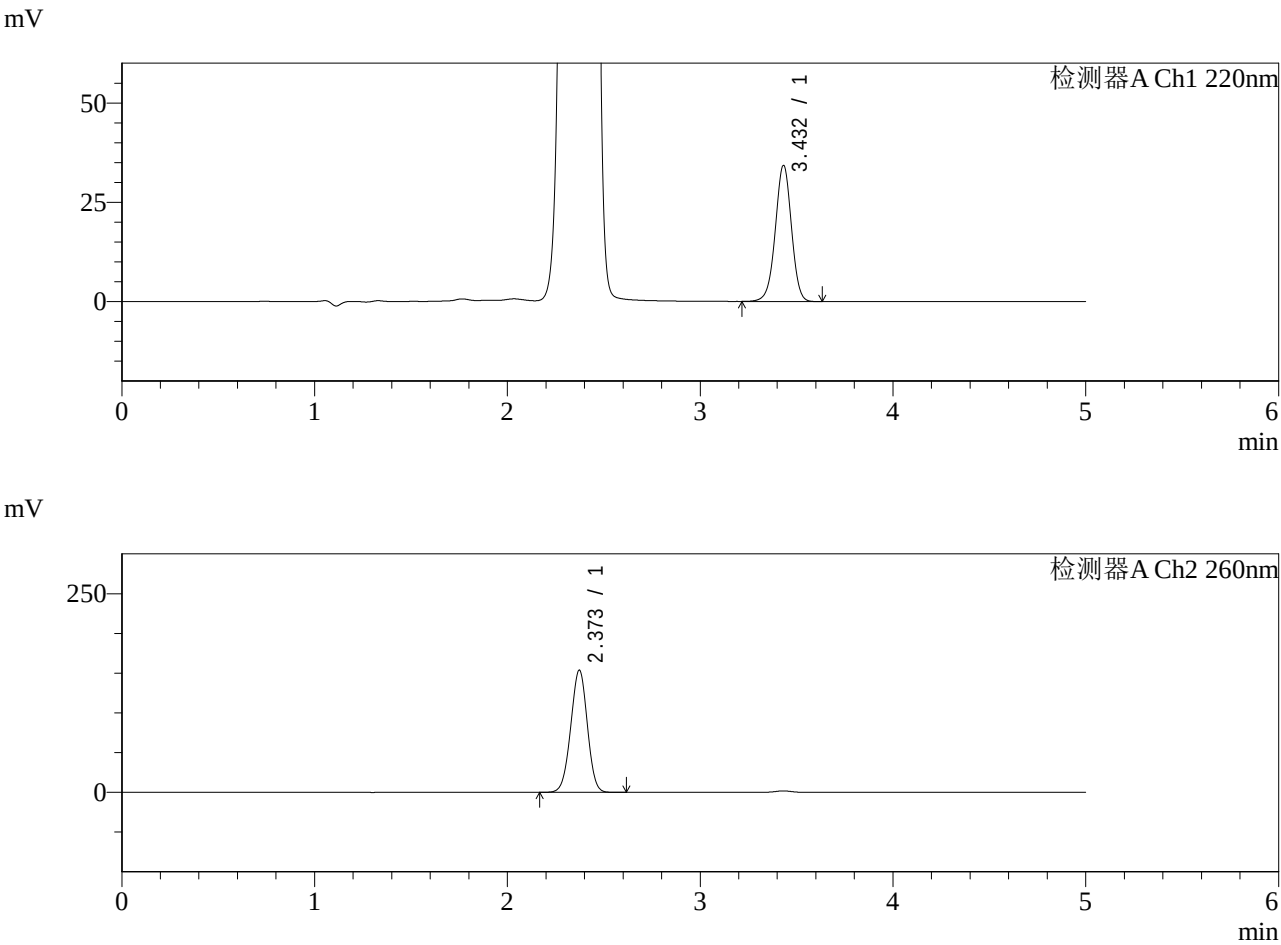

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	196556	100.000	34183	8376	0.981	--
总计		196556	100.000	34183			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	921638	100.000	153780	3590	0.981	--
总计		921638	100.000	153780			

图189 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-530-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 04:33:08
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:23:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

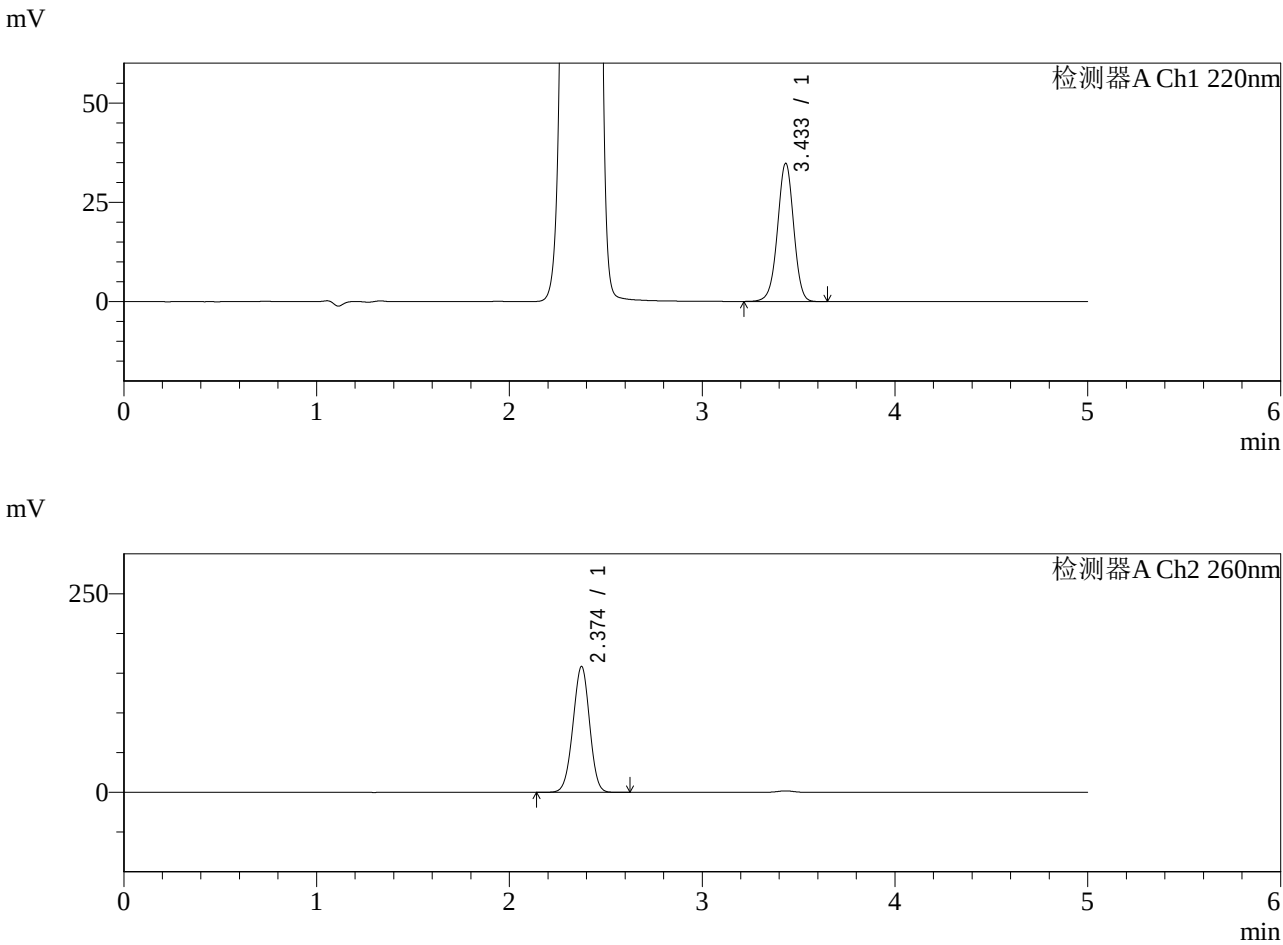

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	199808	100.000	34663	8381	0.981	--
总计		199808	100.000	34663			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	951343	100.000	158165	3579	0.980	--
总计		951343	100.000	158165			

图190 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-531-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 04:38:32
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:23:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

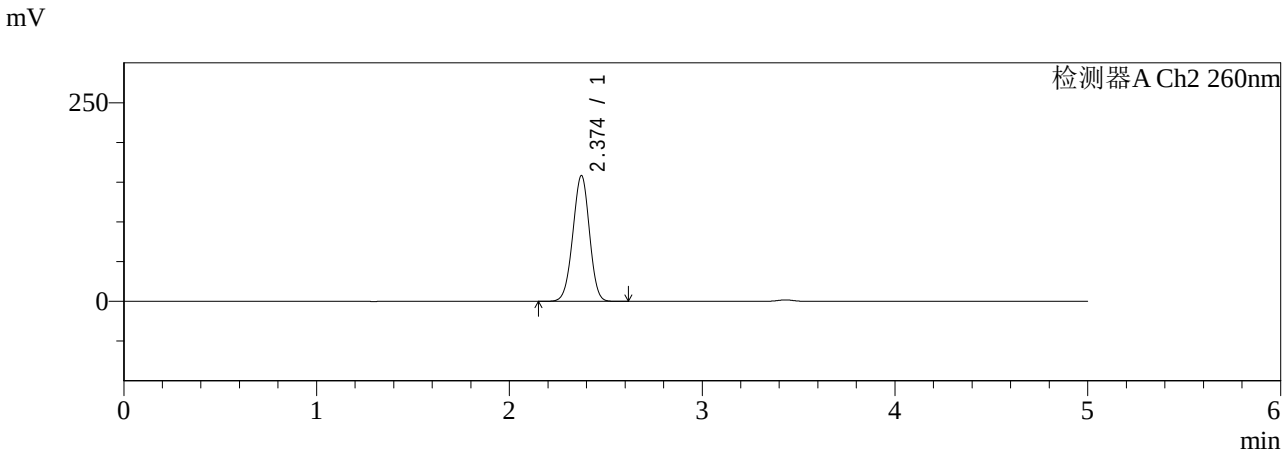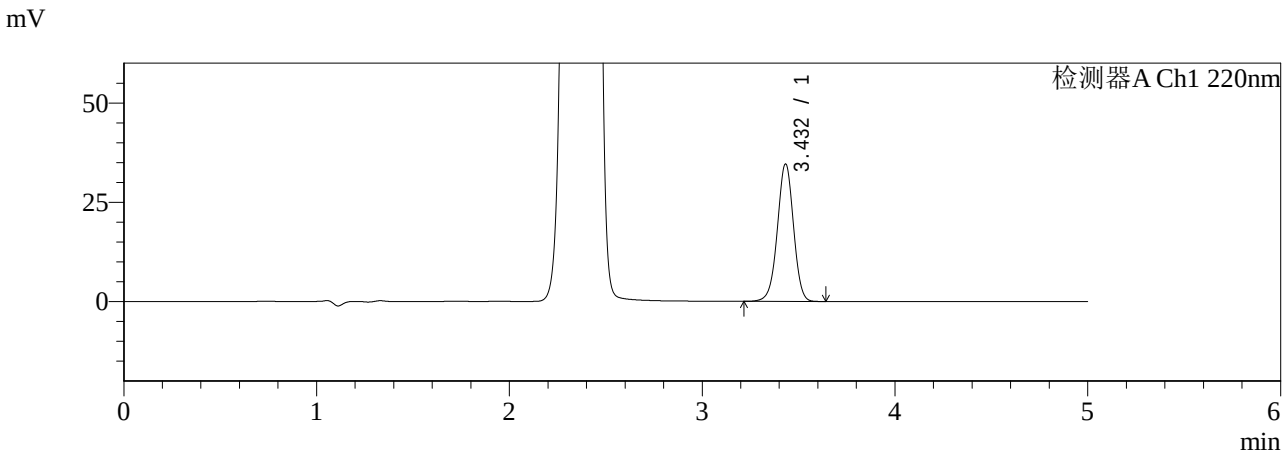

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	198504	100.000	34512	8366	0.981	--
总计		198504	100.000	34512			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	950645	100.000	158221	3577	0.980	--
总计		950645	100.000	158221			

图191 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-532-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 04:43:56
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:23:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

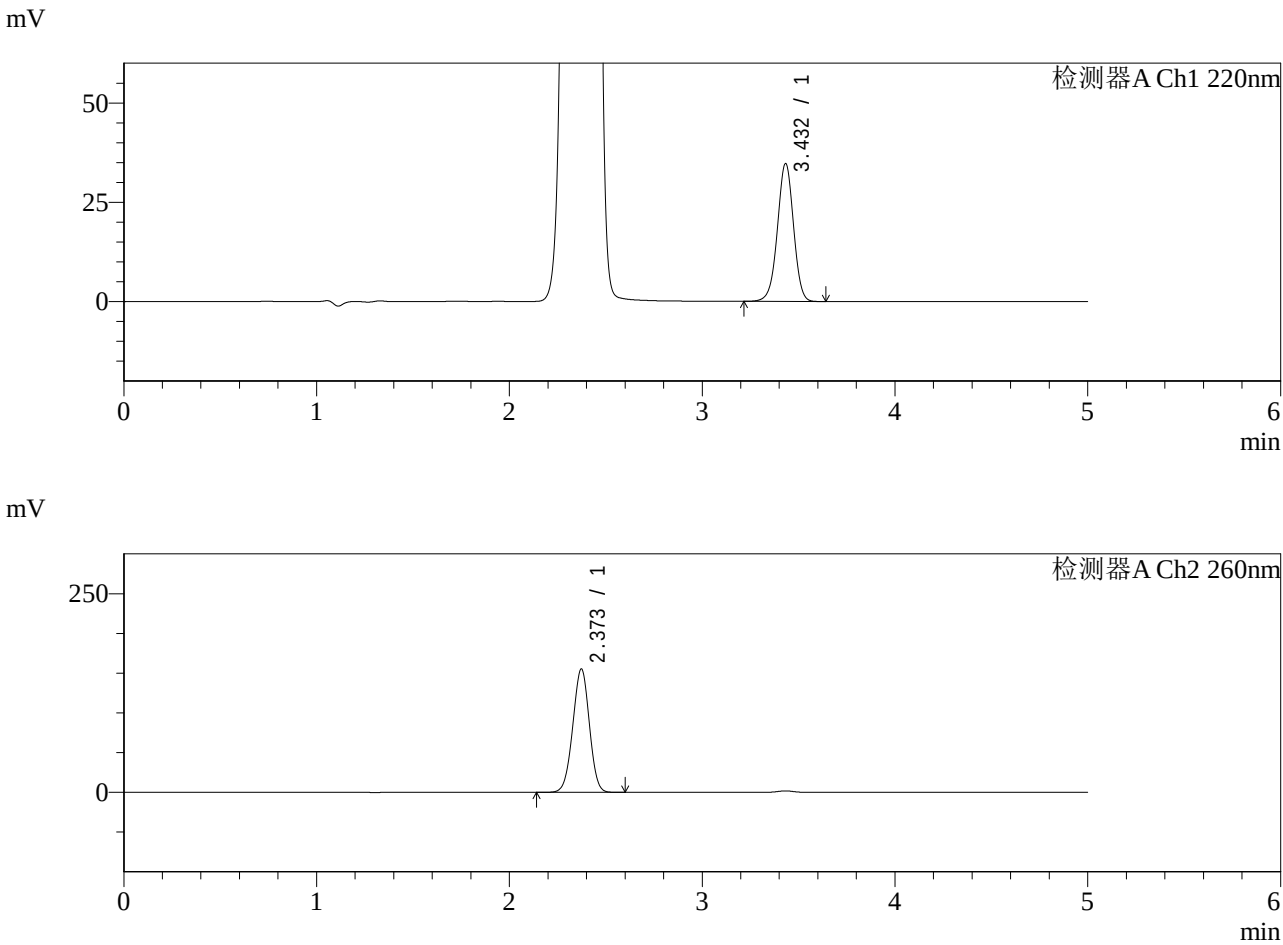

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	199036	100.000	34597	8384	0.981	--
总计		199036	100.000	34597			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	930666	100.000	155173	3588	0.981	--
总计		930666	100.000	155173			

图192 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-533-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 04:49:20
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:23:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

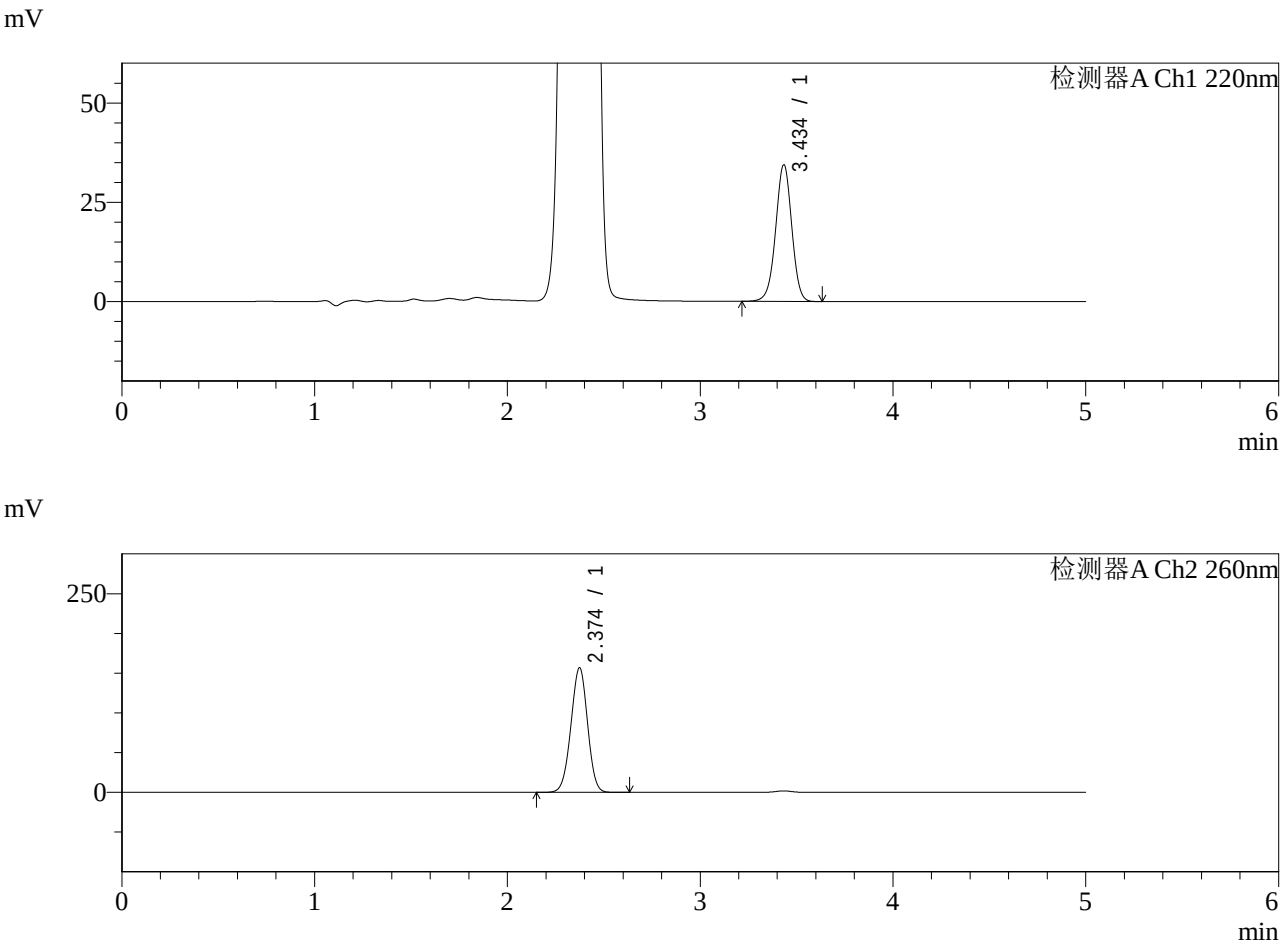

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.434	197457	100.000	34222	8377	0.982	--
总计		197457	100.000	34222			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	941679	100.000	156521	3574	0.981	--
总计		941679	100.000	156521			

图193 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-534-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 04:54:43
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:23:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

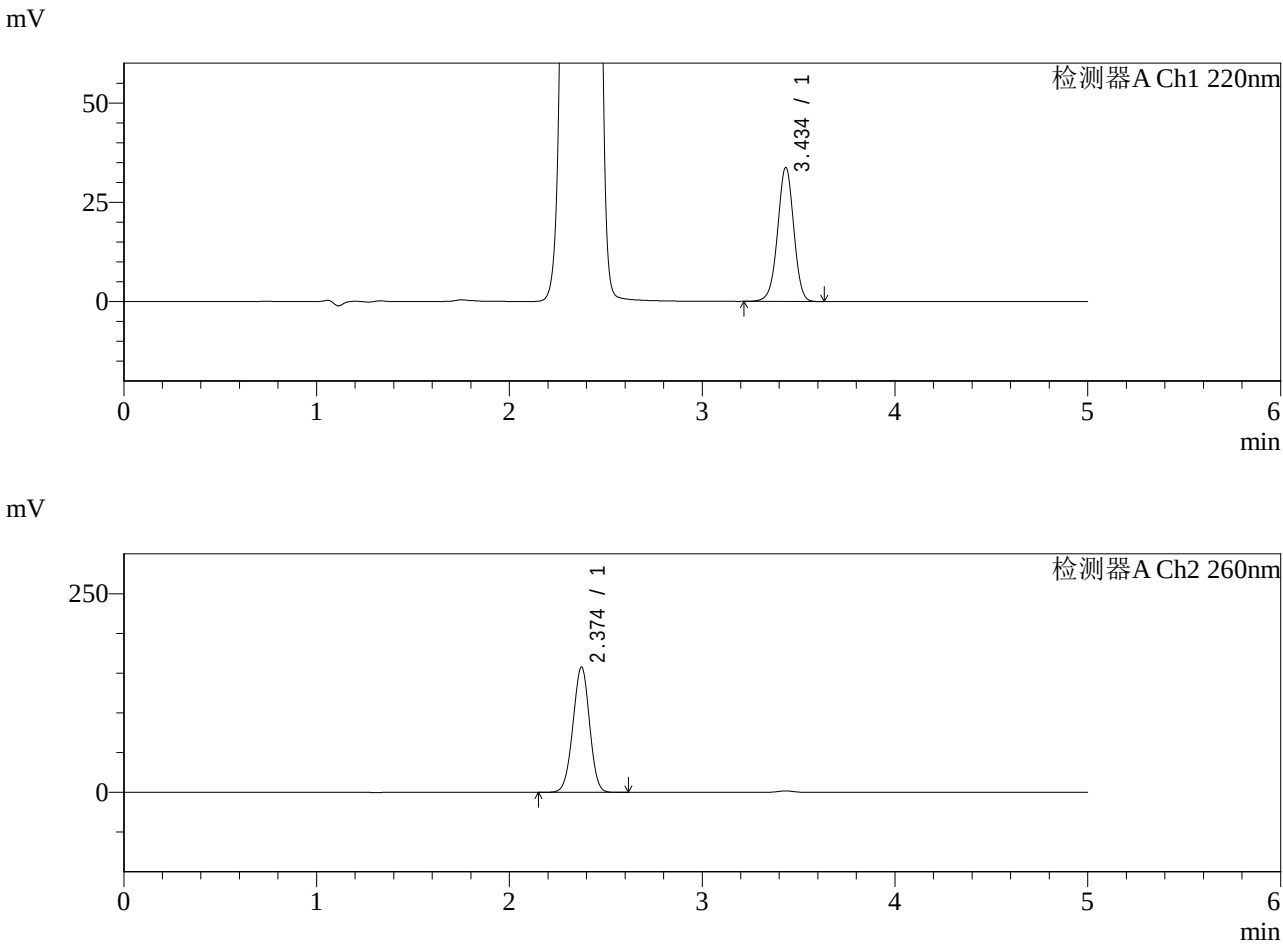

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.434	193536	100.000	33566	8378	0.982	--
总计		193536	100.000	33566			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	947151	100.000	157596	3580	0.980	--
总计		947151	100.000	157596			

图194 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-535-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 05:00:05
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:23:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

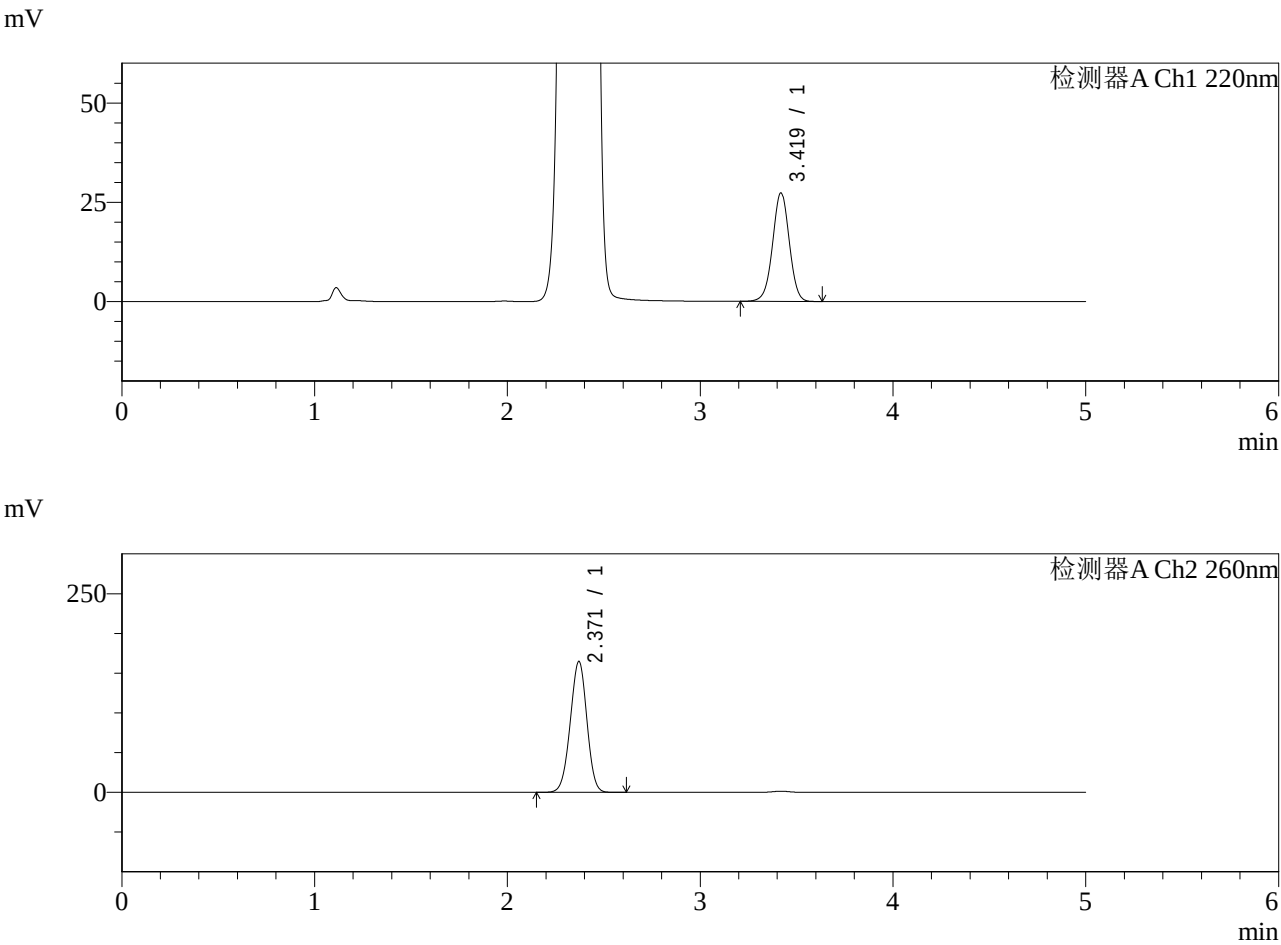

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.419	162999	100.000	27275	7673	0.992	--
总计		162999	100.000	27275			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	989628	100.000	164789	3562	0.976	--
总计		989628	100.000	164789			

图195 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 0-8/11-536-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250115-RCQX-fx260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/16 05:05:27
处理时间 (V2): 2025/01/16 09:23:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

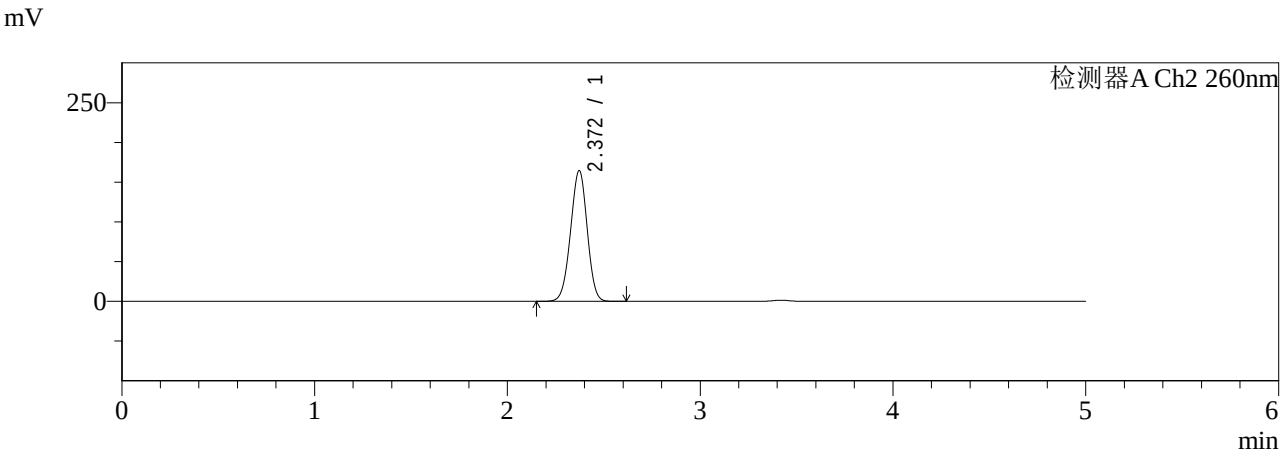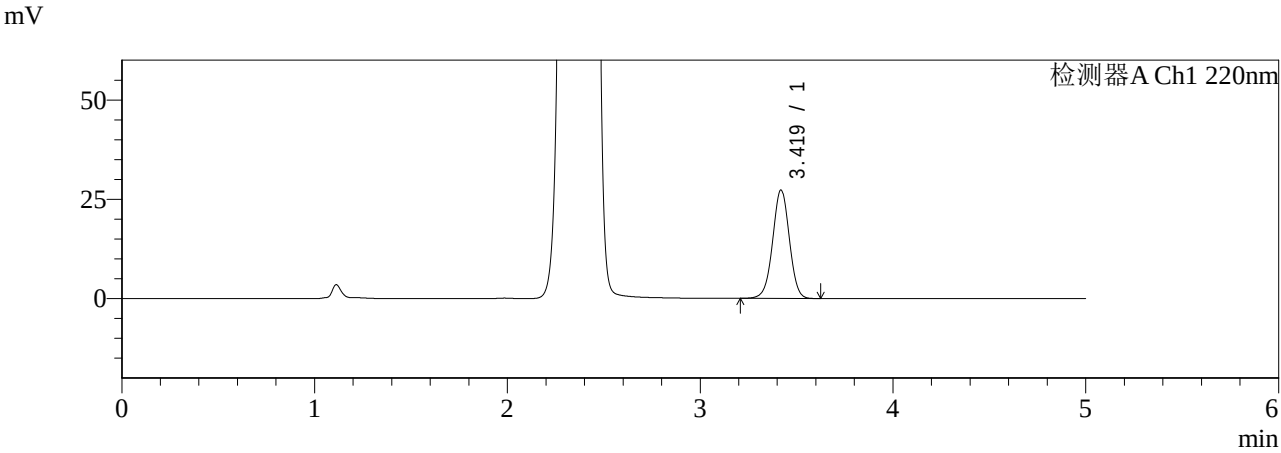

<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.419	162758	100.000	27256	7681	0.993	--
总计		162758	100.000	27256			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	989368	100.000	164617	3564	0.977	--
总计		989368	100.000	164617			

图196 达格列净二甲双胍片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2