



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-989-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：1-9
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 10:56:21
处理时间(V2)：2025/01/14 08:25:05
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>

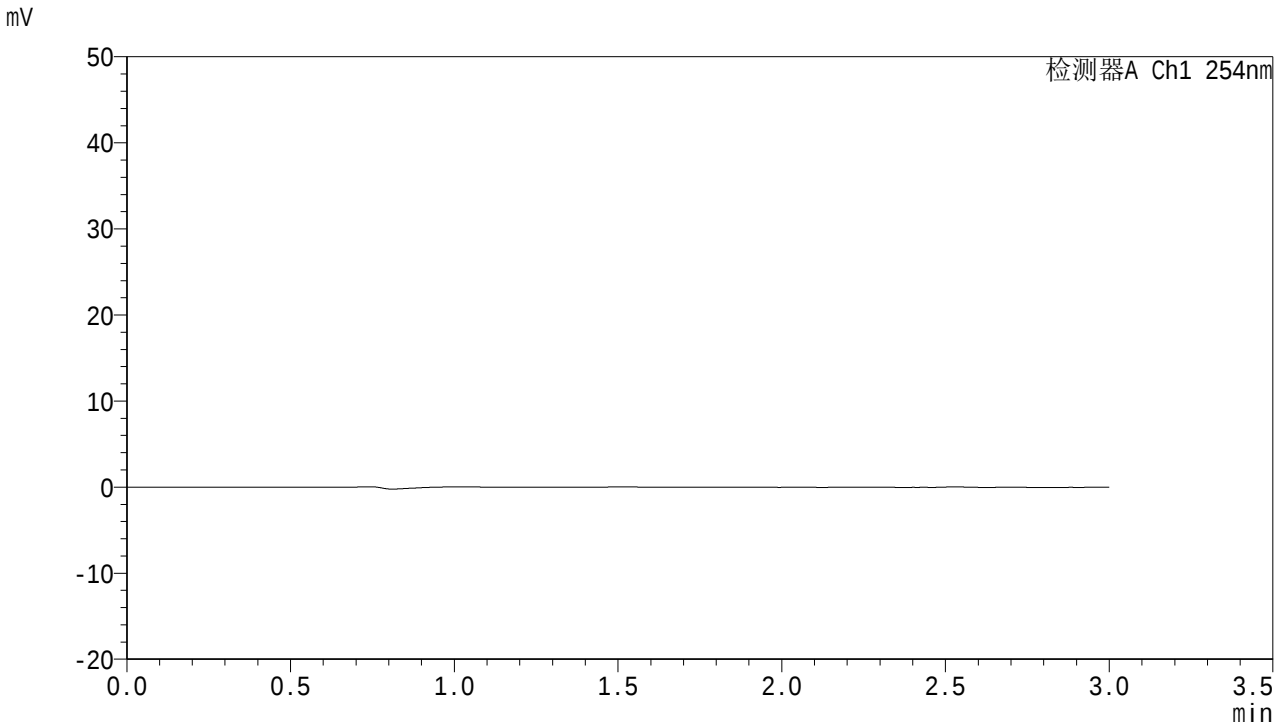

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-990-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 10:59:46

处理时间(V2)：2025/01/14 08:25:09


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

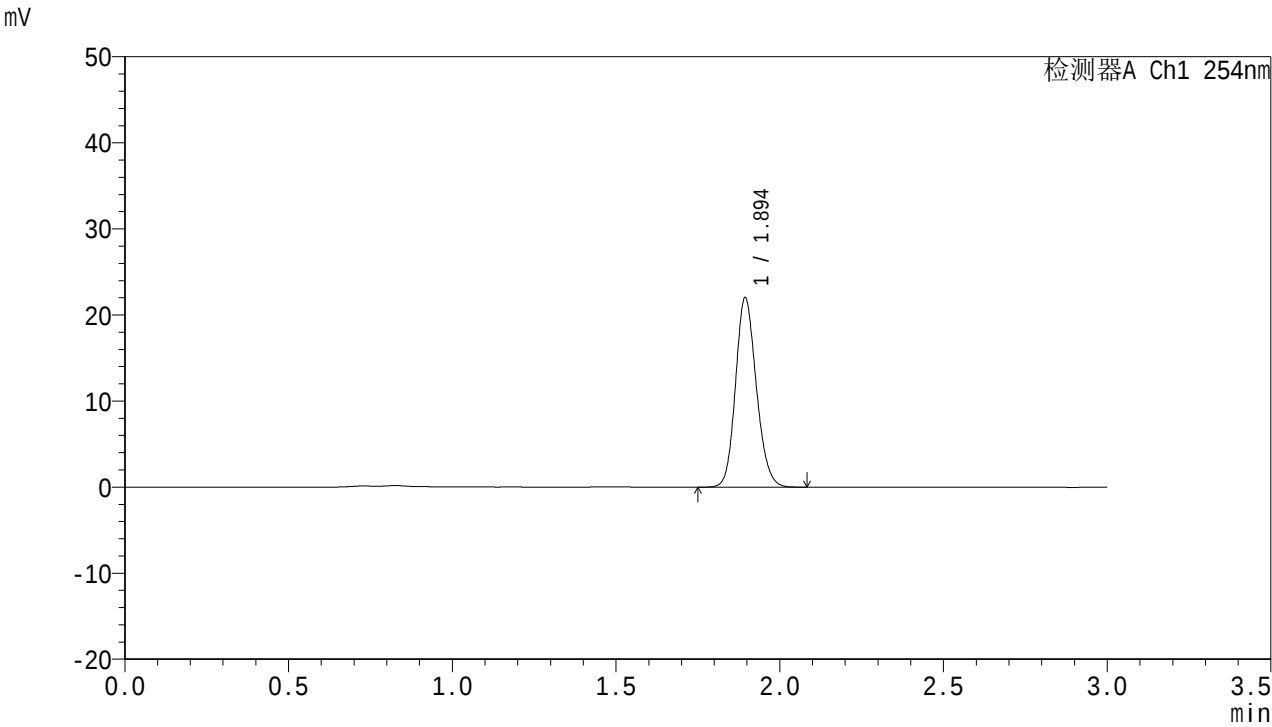

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	97502	100.000	21955	4267	1.152	--
总计		97502	100.000	21955			

图2 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-991-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 11:03:11

处理时间(V2)：2025/01/14 08:25:12


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

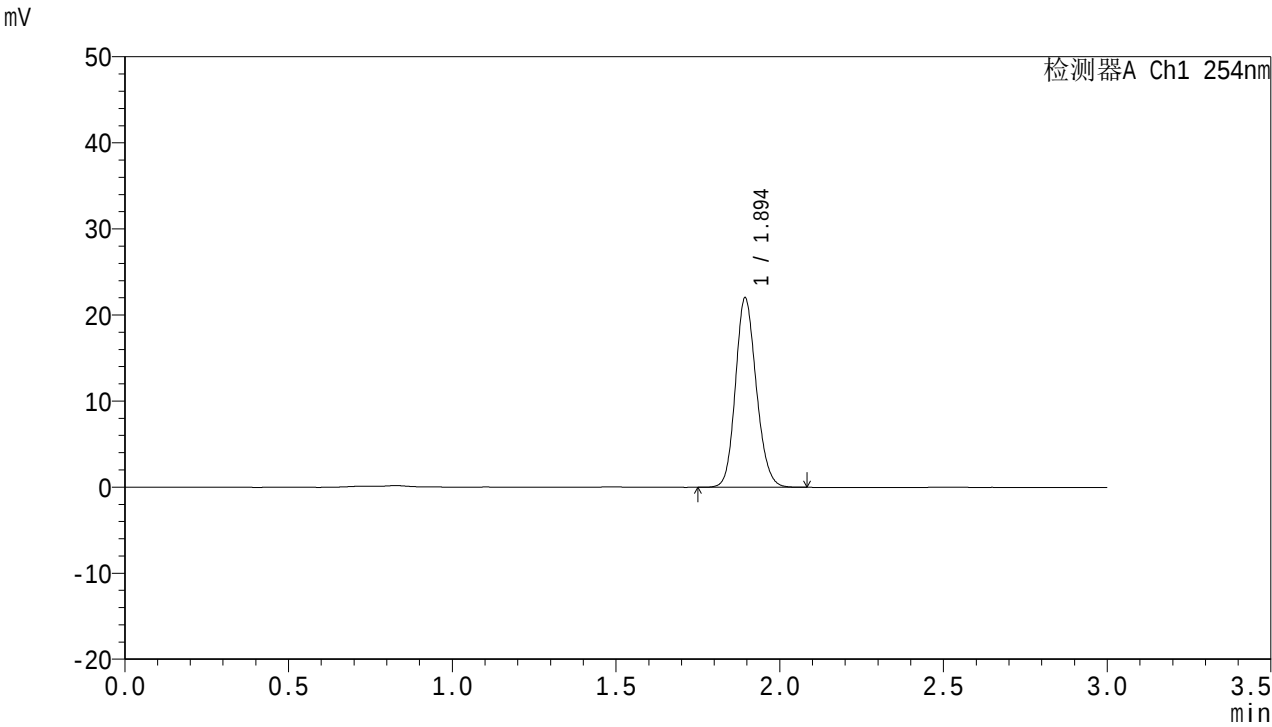

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	97498	100.000	21940	4260	1.149	--
总计		97498	100.000	21940			

图3 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-992-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 11:06:37

处理时间(V2)：2025/01/14 08:25:16

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

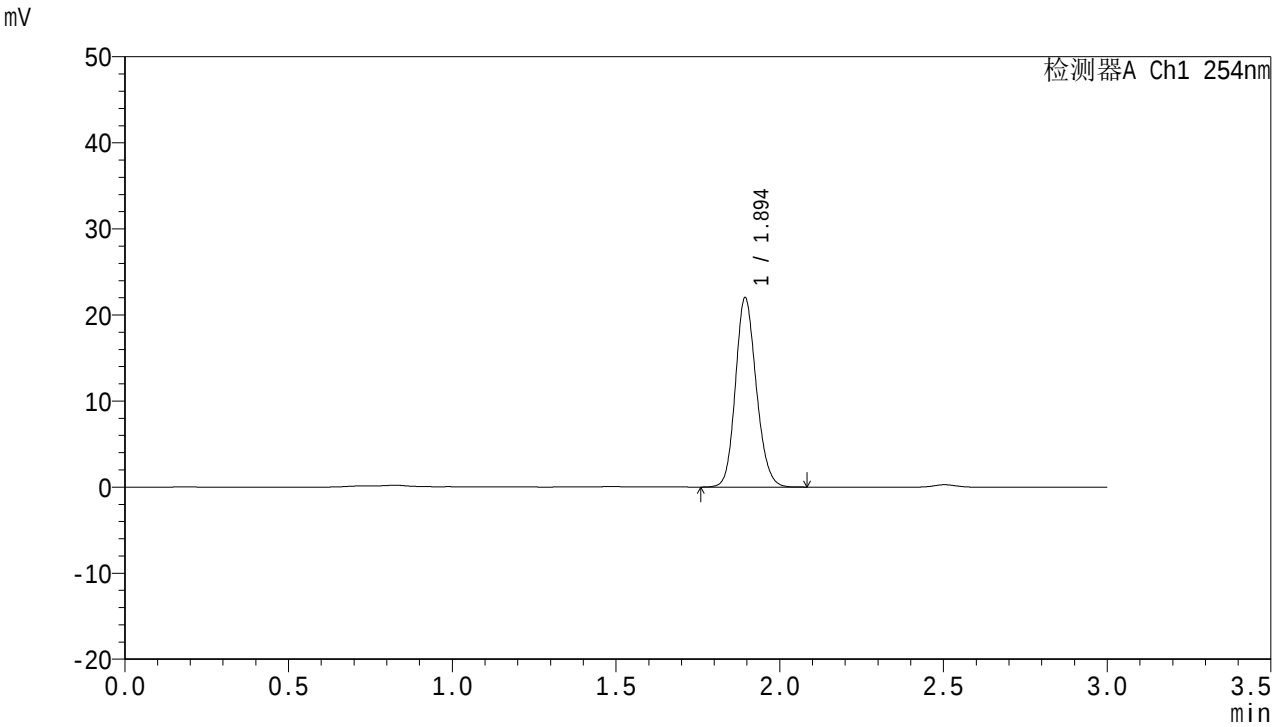

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	97467	100.000	21933	4266	1.150	--
总计		97467	100.000	21933			

图4 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-993-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 11:10:03

处理时间(V2)：2025/01/14 08:25:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

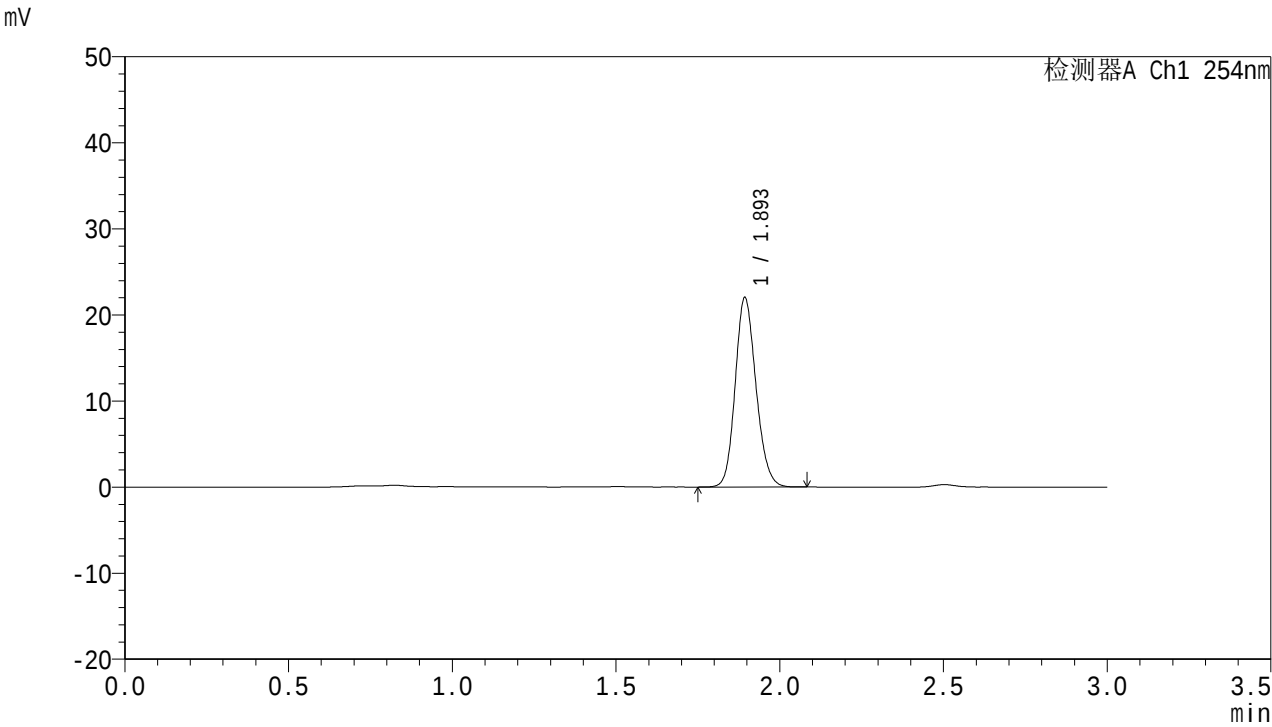

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.893	97349	100.000	21857	4267	1.154	--
总计		97349	100.000	21857			

图5 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-994-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 11:13:28

处理时间(V2)：2025/01/14 08:25:23


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

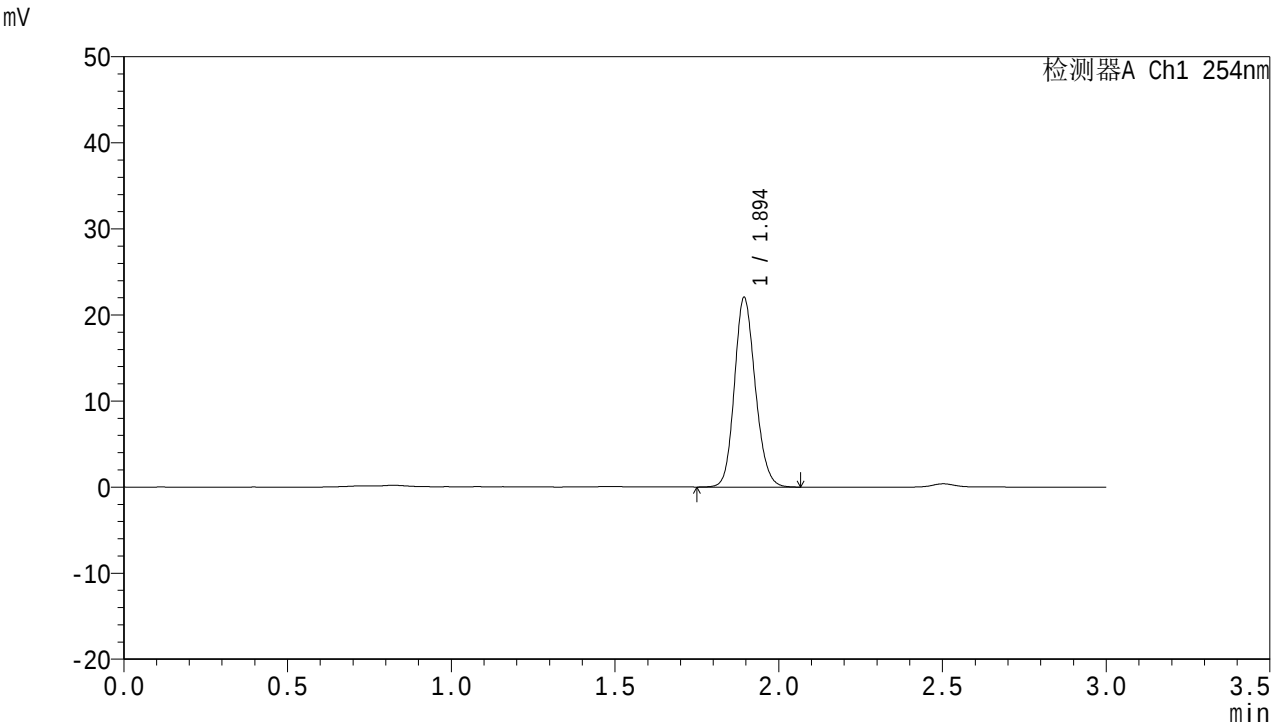

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	97570	100.000	21951	4266	1.151	--
总计		97570	100.000	21951			

图6 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-995-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-1

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 11:16:53

处理时间(V2)：2025/01/14 08:25:26


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

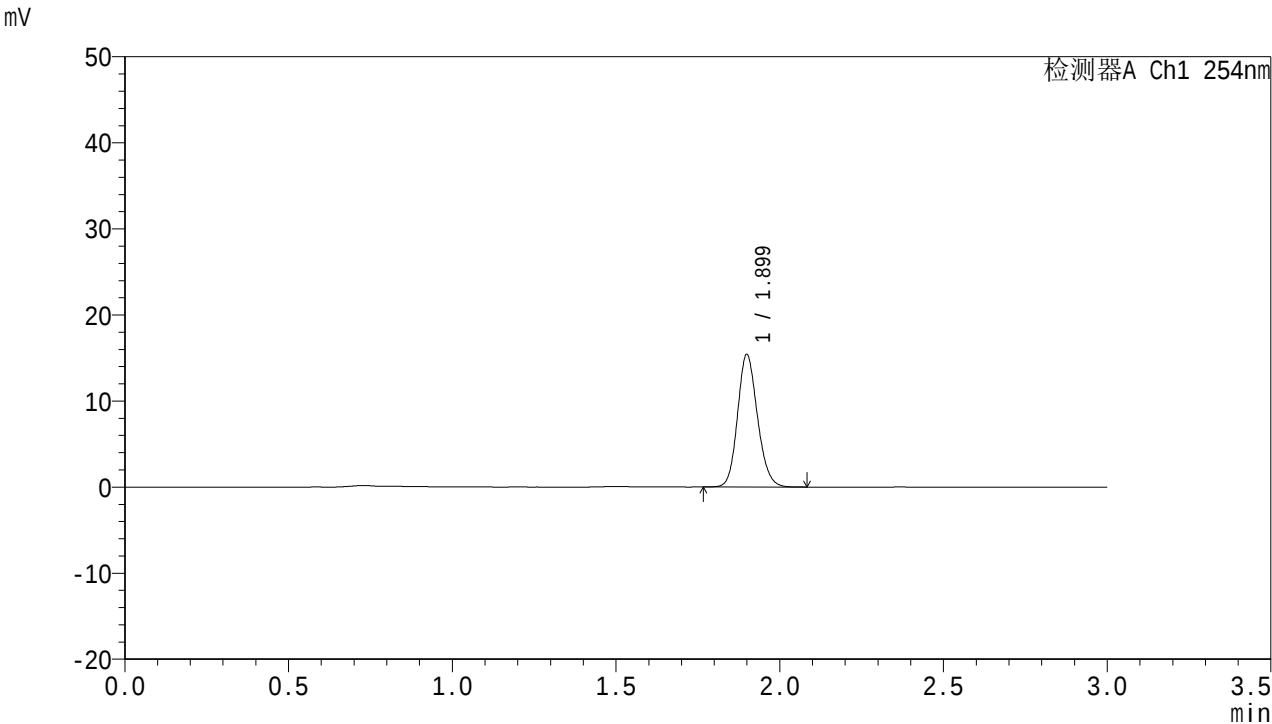

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	65190	100.000	15339	4696	1.151	--
总计		65190	100.000	15339			

图7 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-996-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-10

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 11:20:18

处理时间(V2)：2025/01/14 08:25:29


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

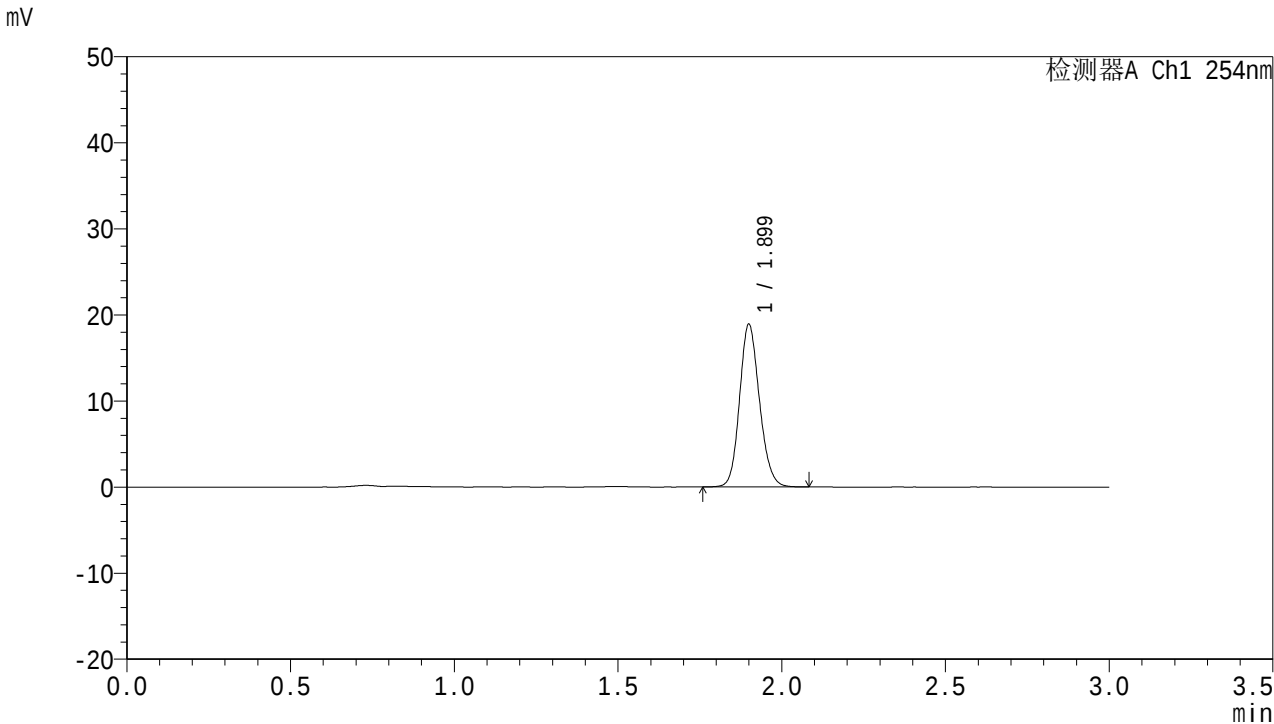

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	79922	100.000	18812	4706	1.149	--
总计		79922	100.000	18812			

图8 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-997-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：1-19
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 11:23:43 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:25:31 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

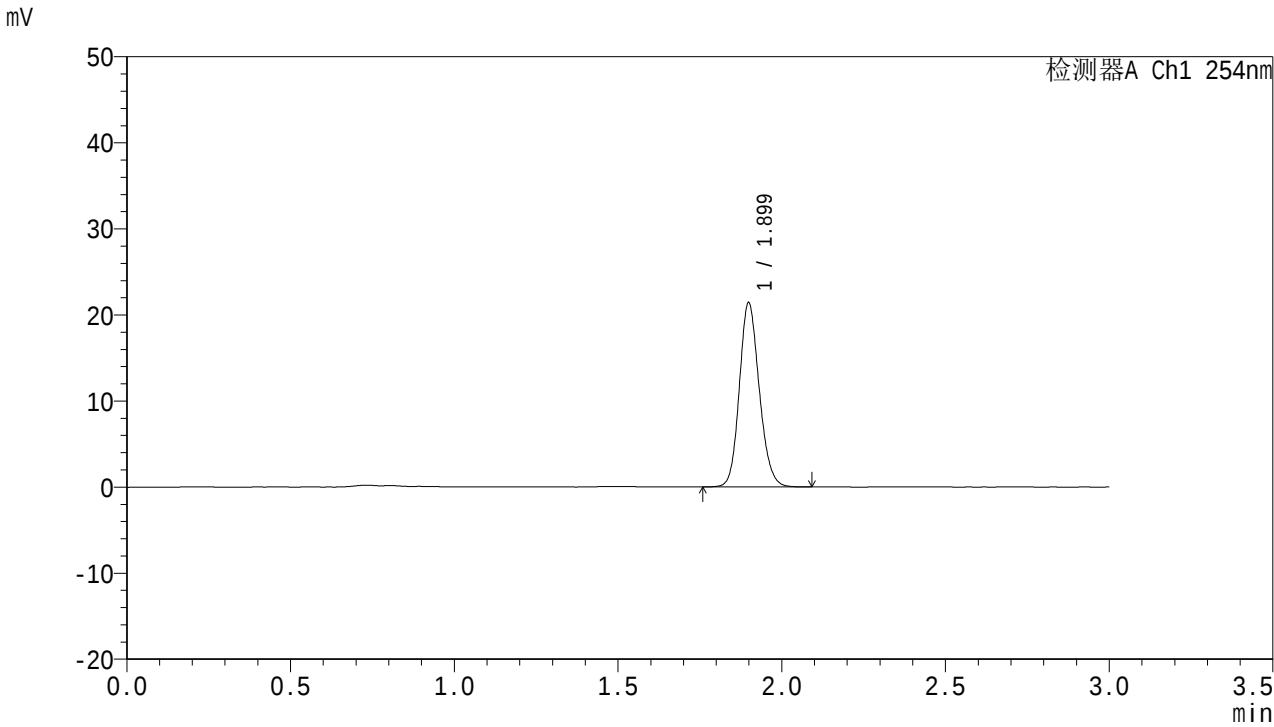

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	90466	100.000	21344	4715	1.151	--
总计		90466	100.000	21344			

图9 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-998-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-28

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 11:27:08

处理时间(V2)：2025/01/14 08:25:34


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

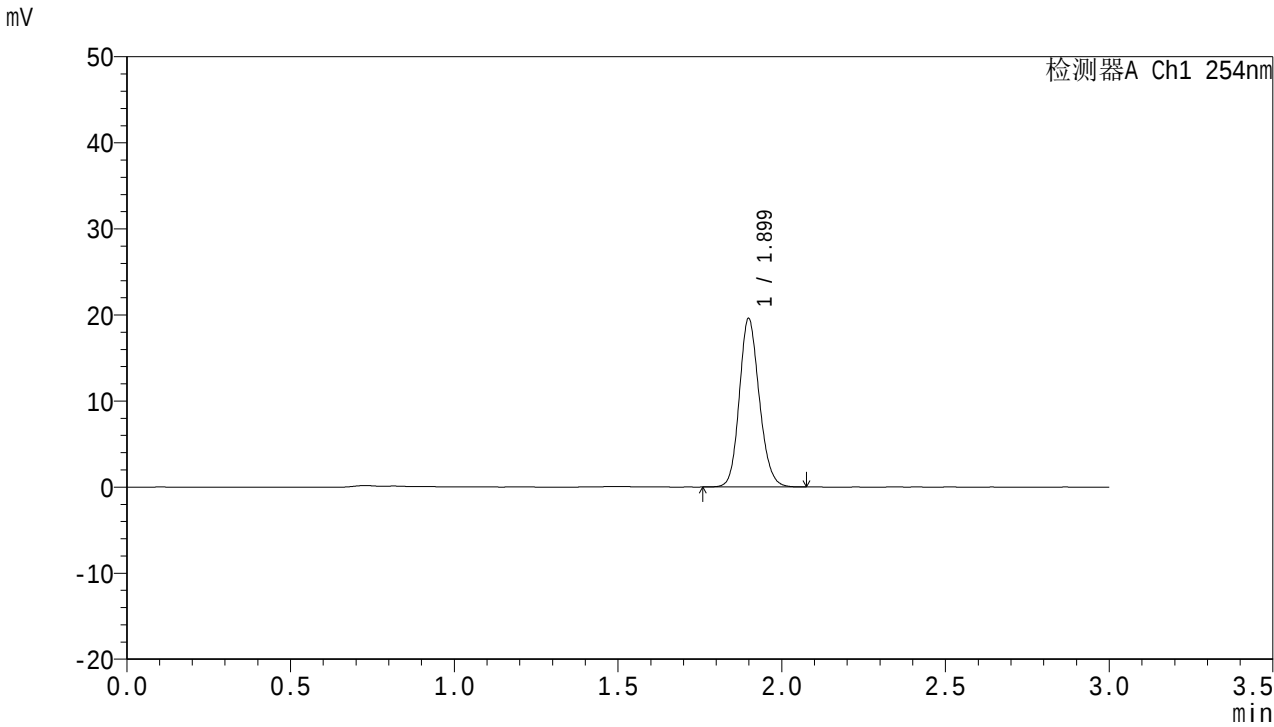

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	82937	100.000	19539	4704	1.150	--
总计		82937	100.000	19539			

图10 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-999-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-37

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 11:30:34

处理时间(V2)：2025/01/14 08:25:37


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

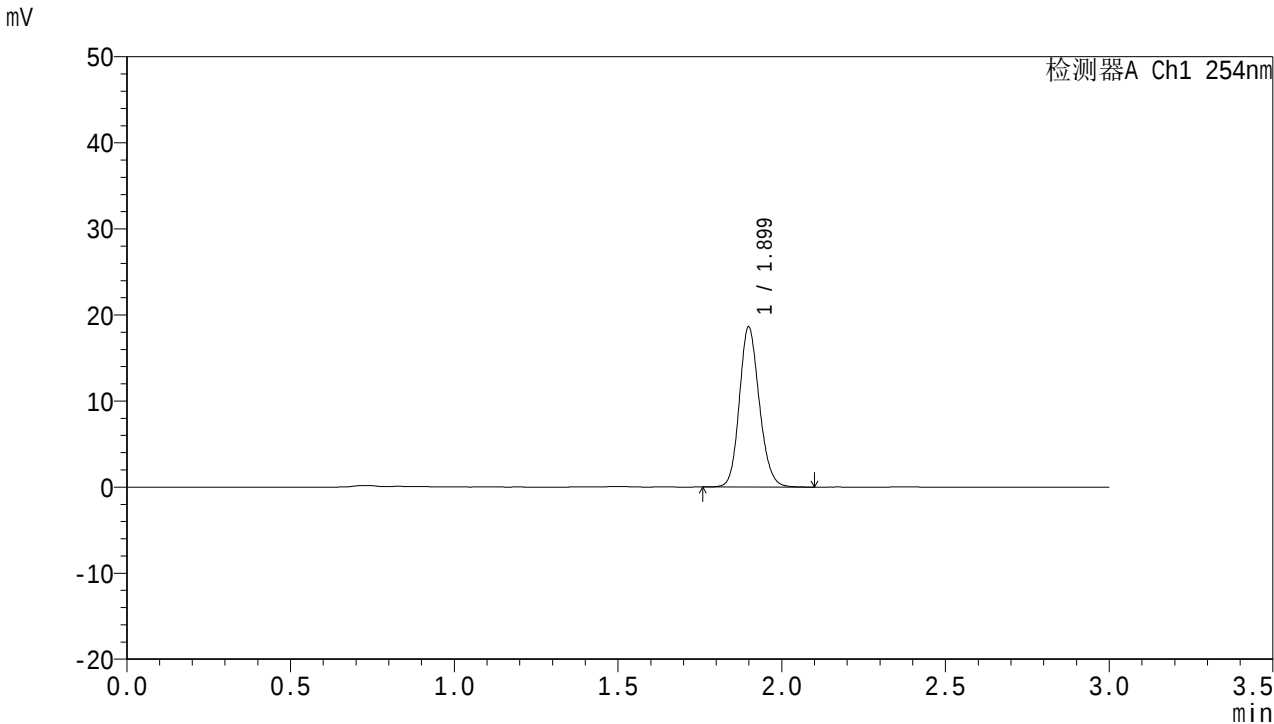

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	78769	100.000	18552	4706	1.150	--
总计		78769	100.000	18552			

图11 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1000-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-46

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 11:33:59

处理时间(V2)：2025/01/14 08:25:40


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

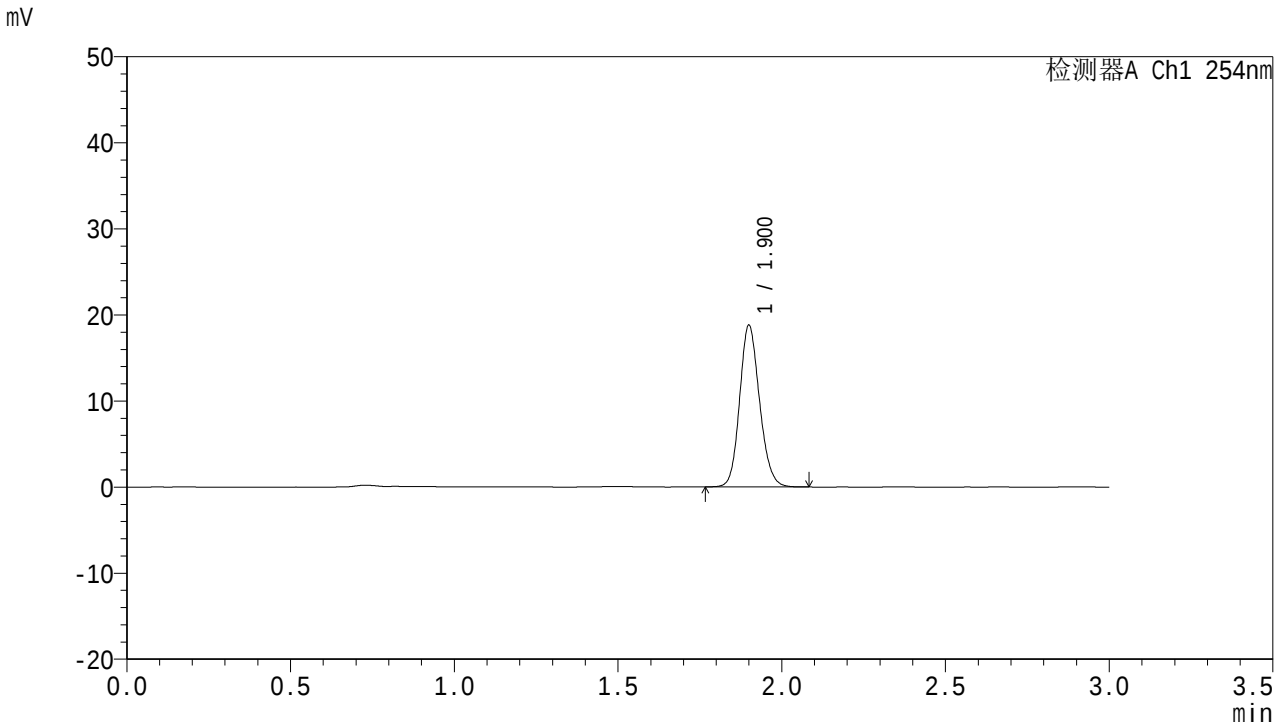

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	79486	100.000	18695	4714	1.149	--
总计		79486	100.000	18695			

图12 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1001-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-2

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 11:37:24

处理时间(V2)：2025/01/14 08:25:43


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

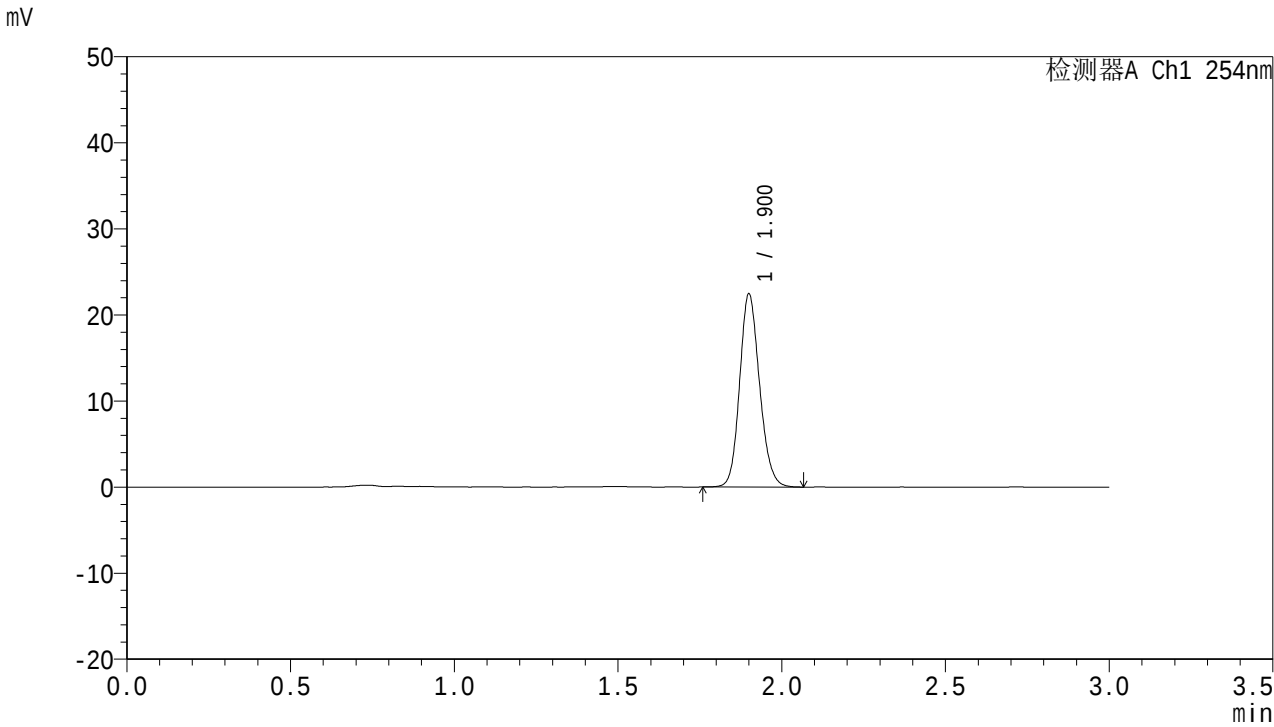

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	94945	100.000	22317	4713	1.150	--
总计		94945	100.000	22317			

图13 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1002-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：1-11
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 11:40:49 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:25:45 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

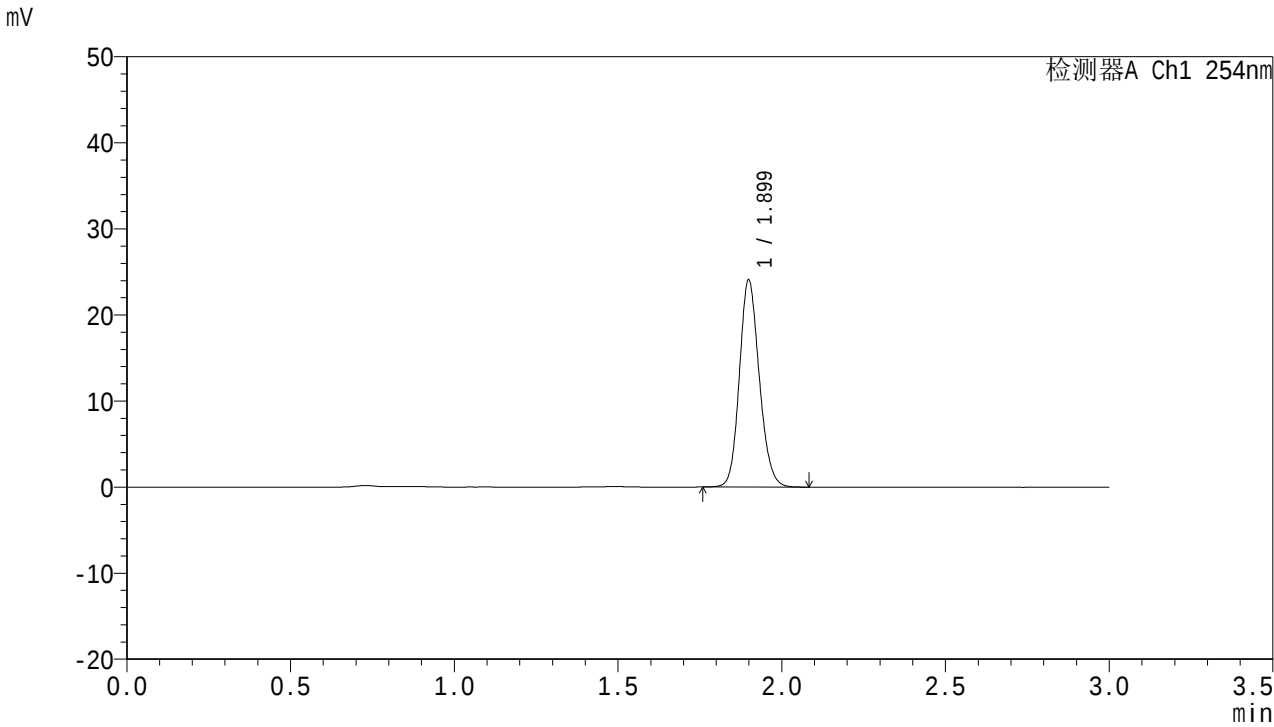

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	101584	100.000	23990	4720	1.148	--
总计		101584	100.000	23990			

图14 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1003-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：1-20
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 11:44:15
处理时间(V2)：2025/01/14 08:25:48
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>

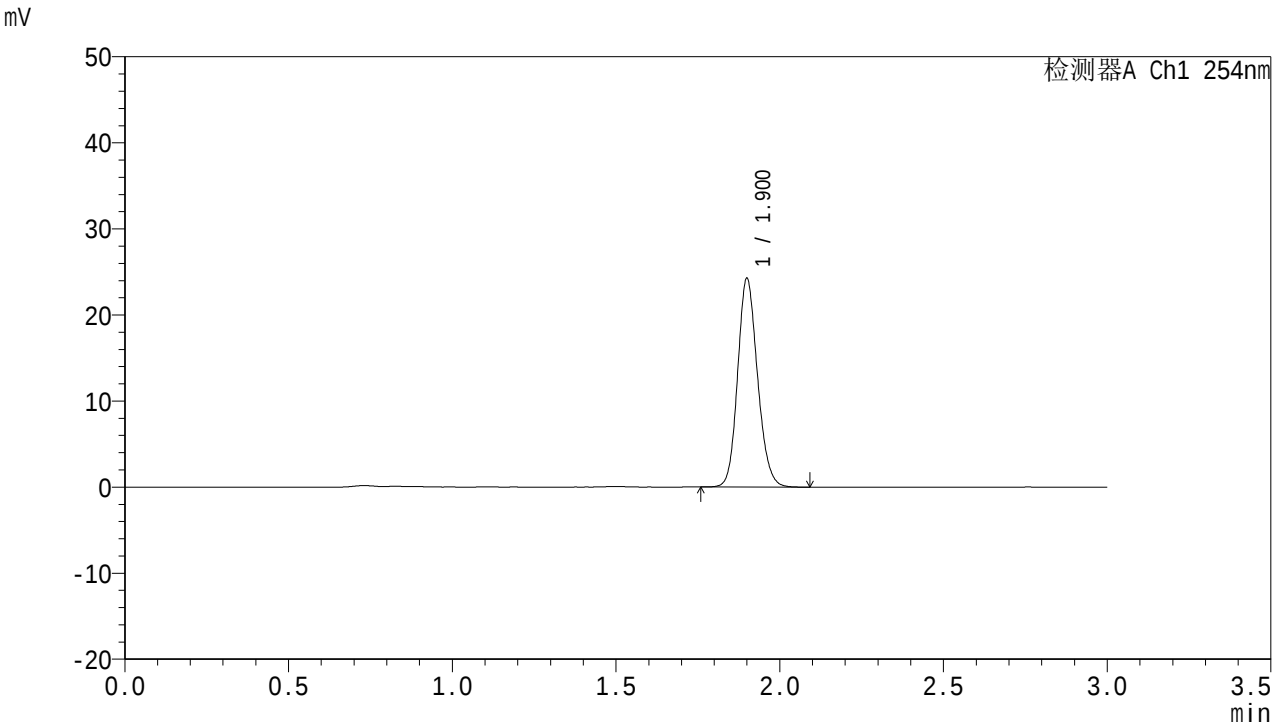

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	102355	100.000	24107	4724	1.150	--
总计		102355	100.000	24107			

图15 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1004-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：1-29
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 11:47:40
处理时间(V2)：2025/01/14 08:25:51
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>

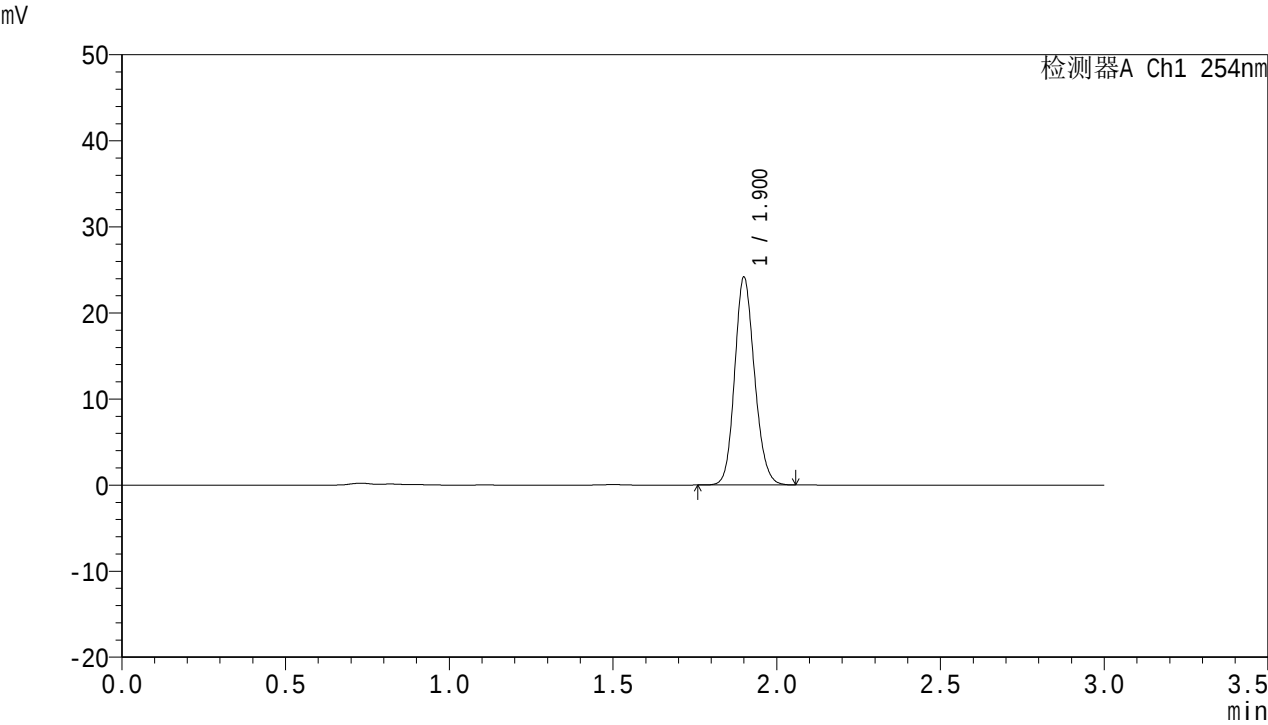

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	101841	100.000	24011	4732	1.147	--
总计		101841	100.000	24011			

图16 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1005-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：1-38
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 11:51:05
处理时间(V2)：2025/01/14 08:25:54
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>

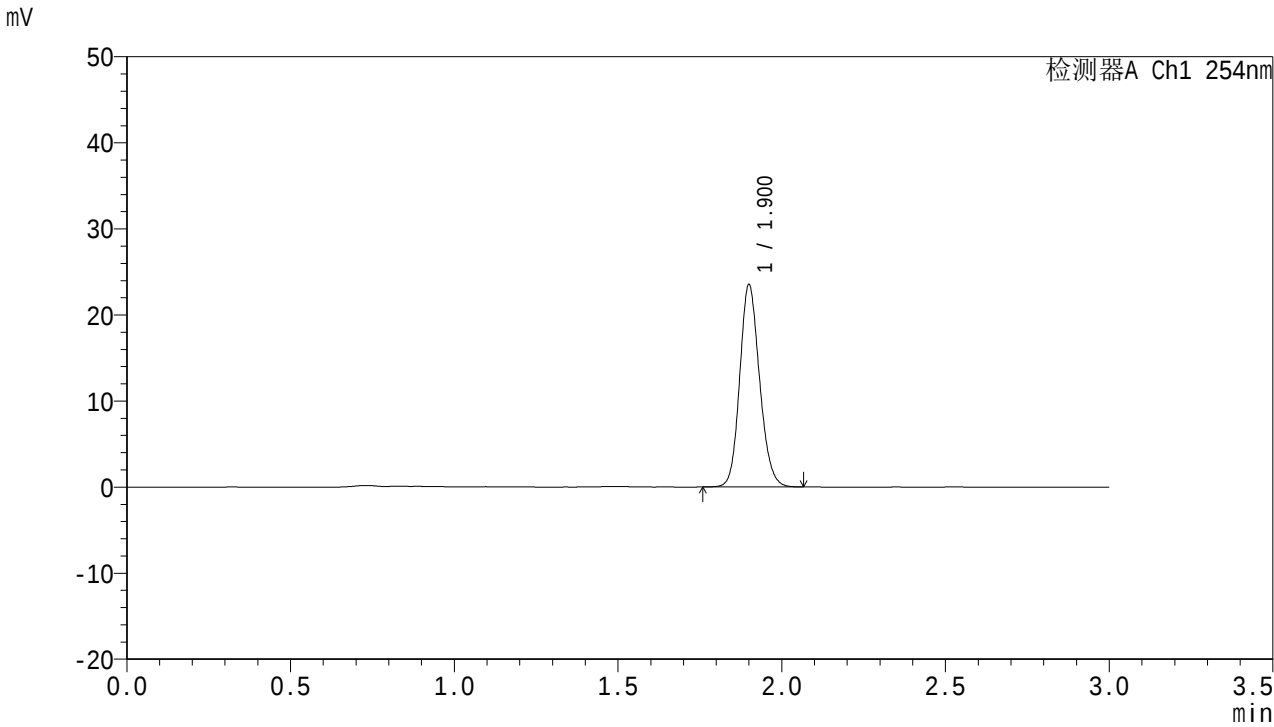

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	99089	100.000	23360	4738	1.148	--
总计		99089	100.000	23360			

图17 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1006-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-47

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 11:54:30

处理时间(V2)：2025/01/14 08:25:57


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

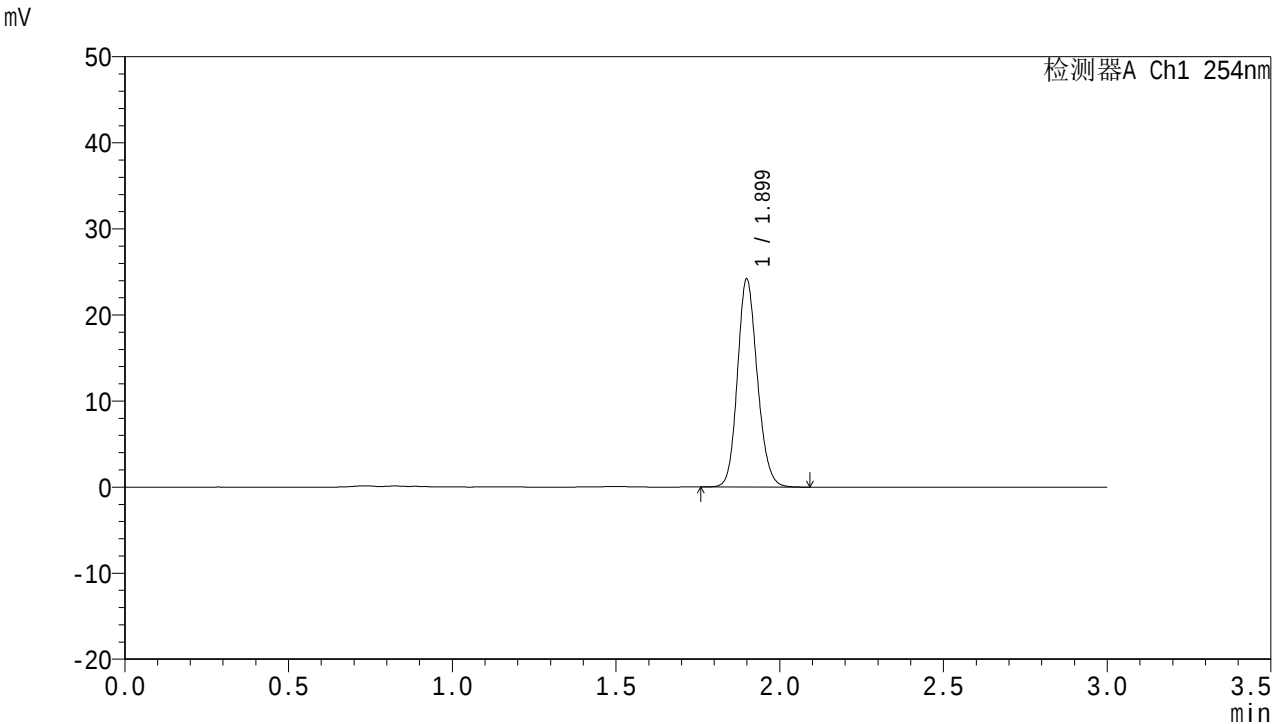

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	101936	100.000	24088	4728	1.147	--
总计		101936	100.000	24088			

图18 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1007-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-3

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 11:57:55

处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:00


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

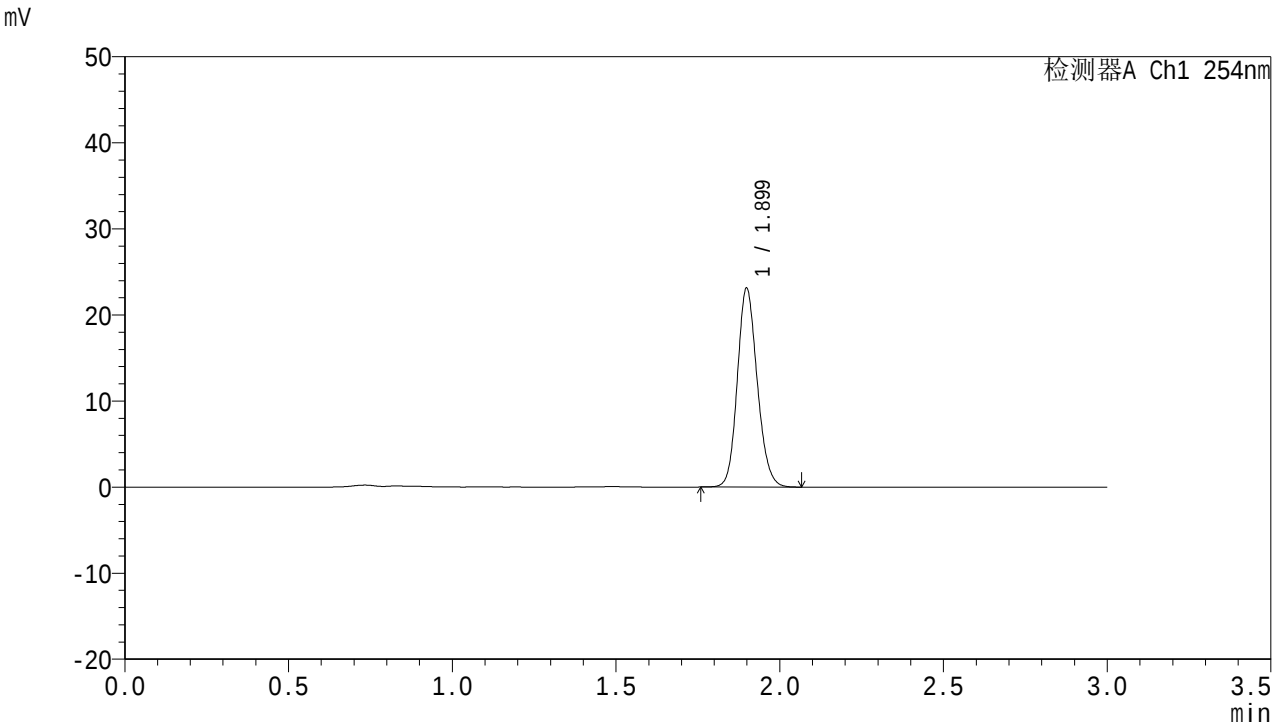

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	97584	100.000	23049	4717	1.148	--
总计		97584	100.000	23049			

图19 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1008-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-12

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 12:01:21

处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:03


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

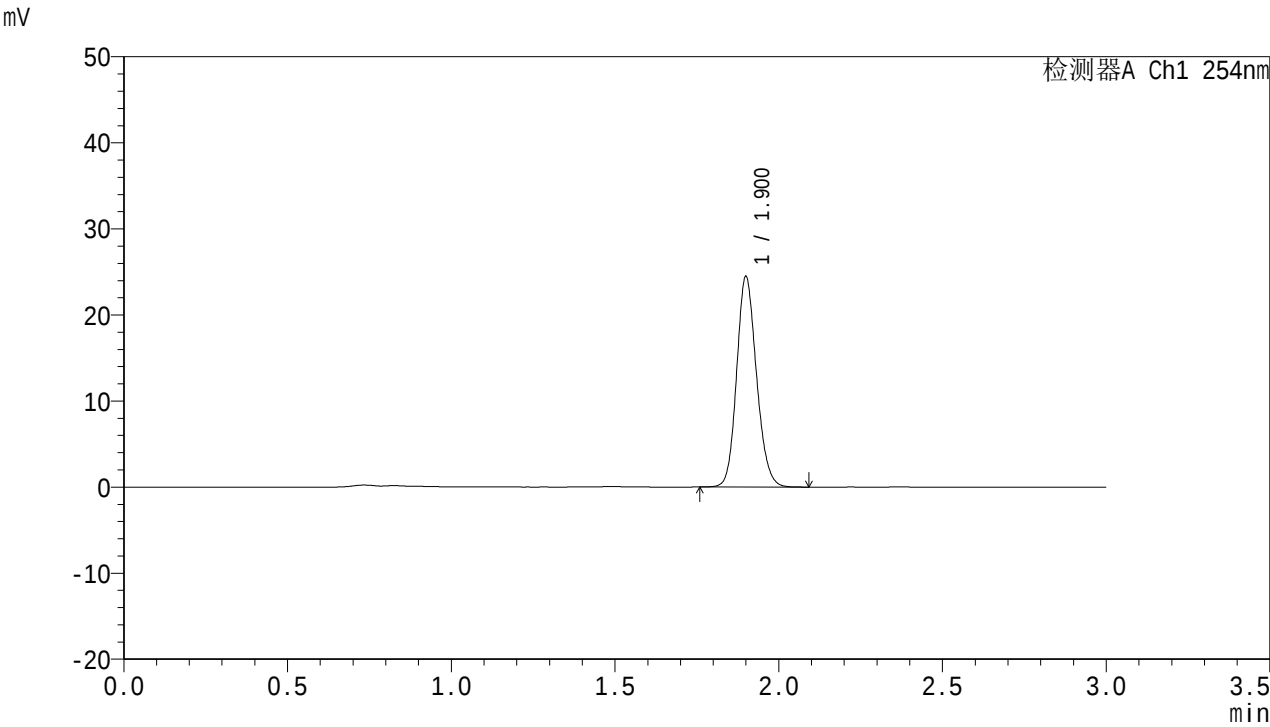

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	103196	100.000	24329	4731	1.149	--
总计		103196	100.000	24329			

图20 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1009-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-21

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 12:04:47

处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:06


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

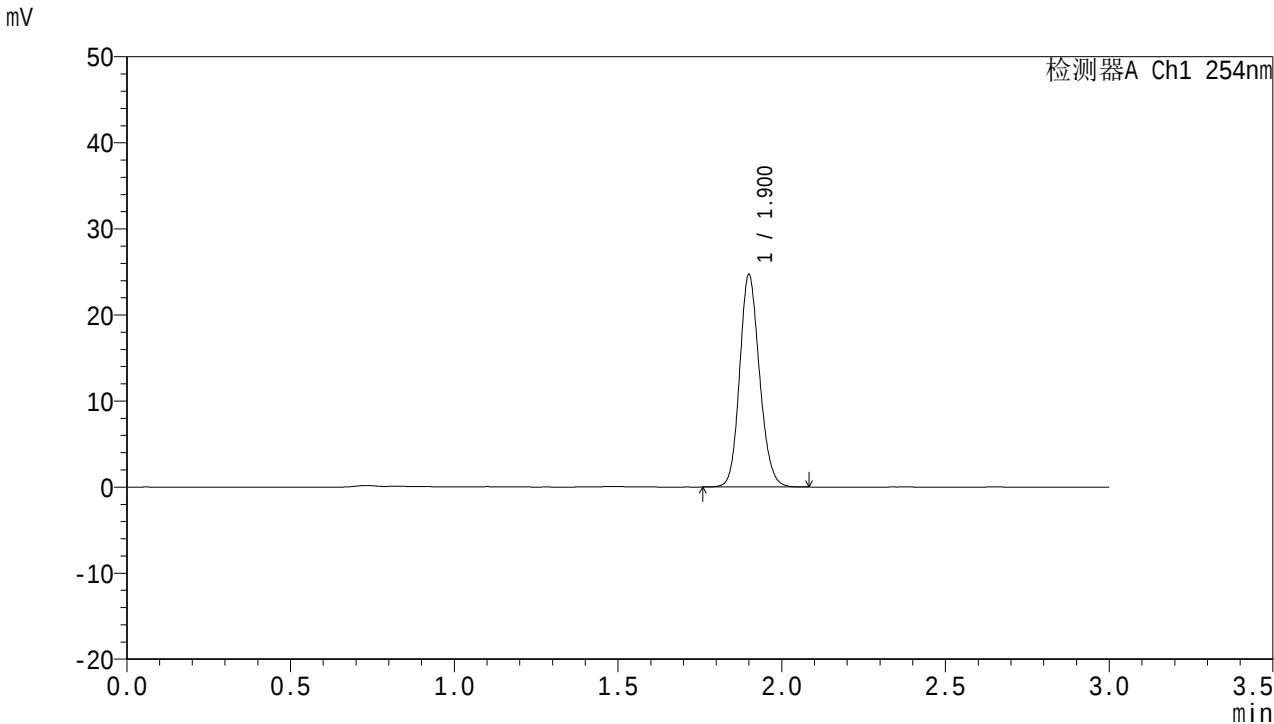

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	104321	100.000	24554	4717	1.147	--
总计		104321	100.000	24554			

图21 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1010-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-30

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 12:08:12

处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:09


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

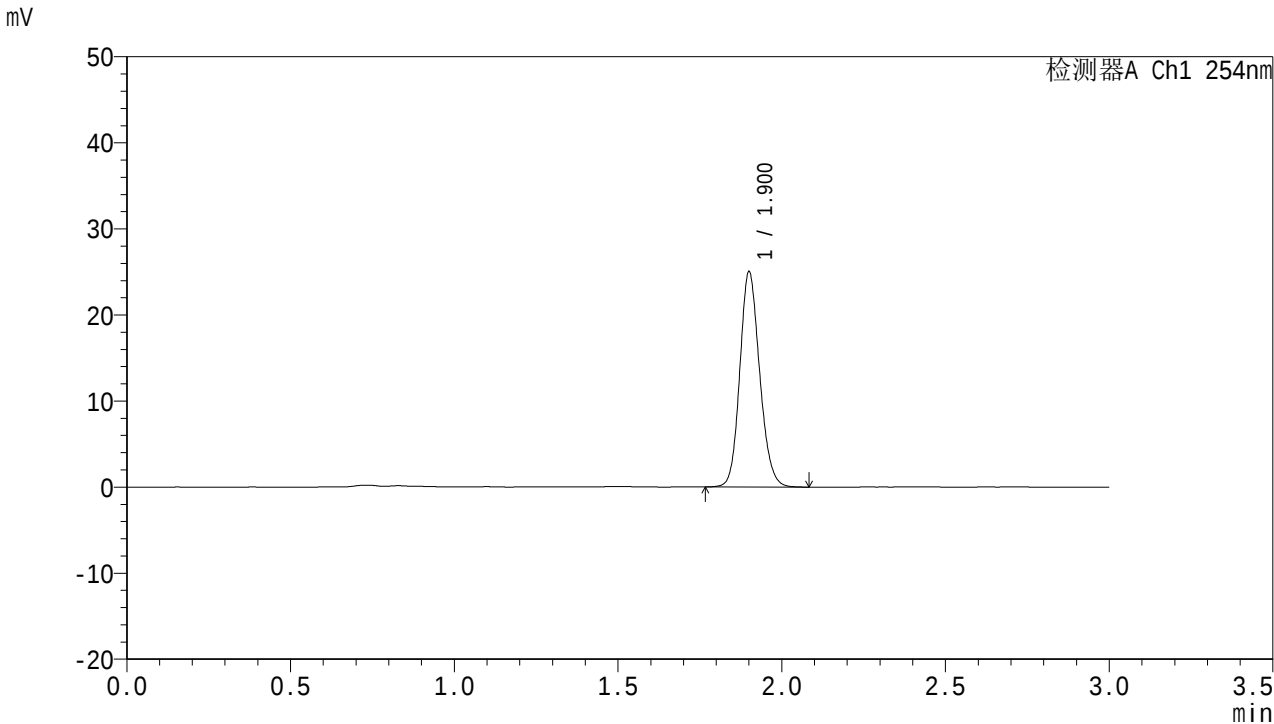

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	105417	100.000	24821	4756	1.149	--
总计		105417	100.000	24821			

图22 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1011-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-39

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 12:11:37

处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:12


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

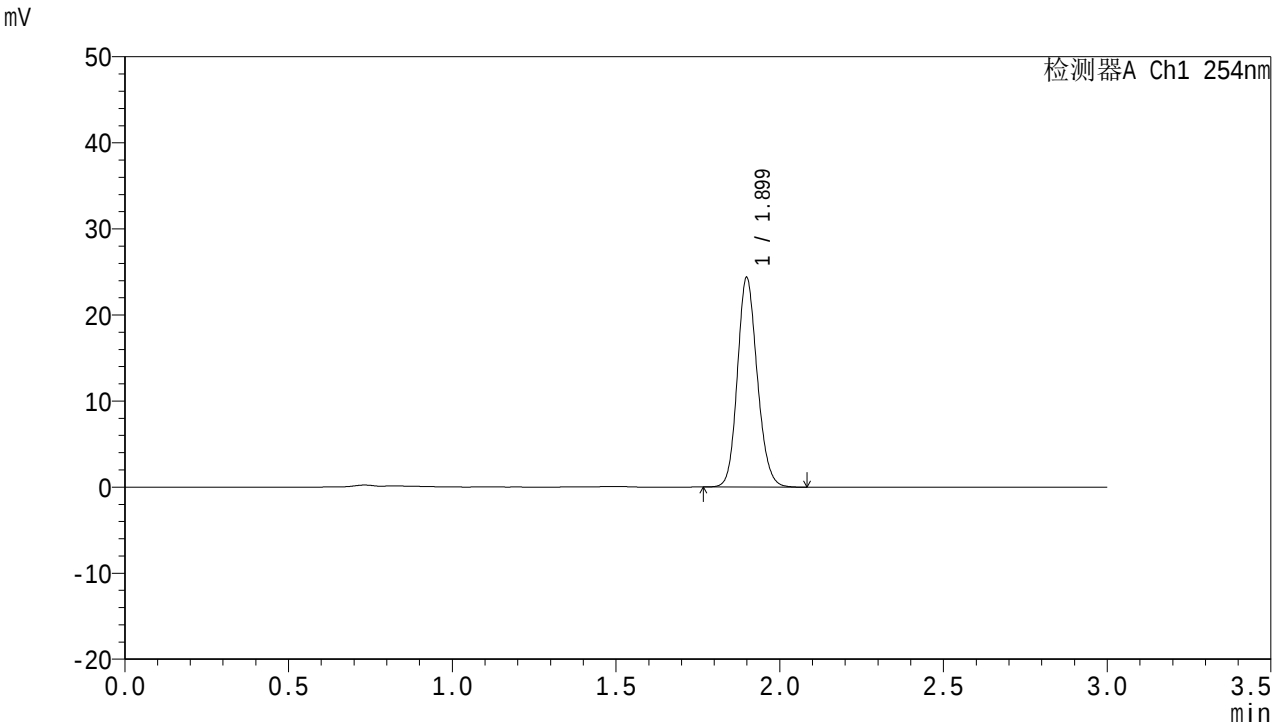

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	102722	100.000	24274	4729	1.148	--
总计		102722	100.000	24274			

图23 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1012-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-48

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 12:15:02

处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:15


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

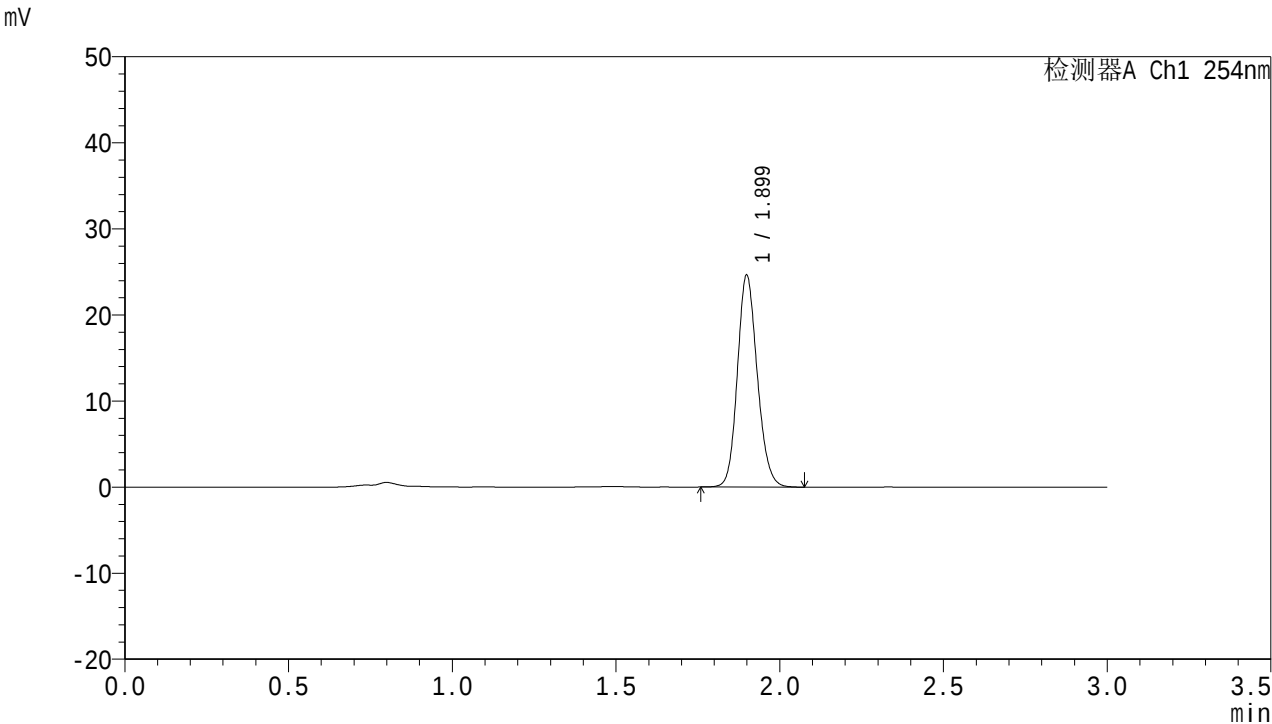

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	103994	100.000	24554	4723	1.148	--
总计		103994	100.000	24554			

图24 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1013-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：1-4
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 12:18:27 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:18 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

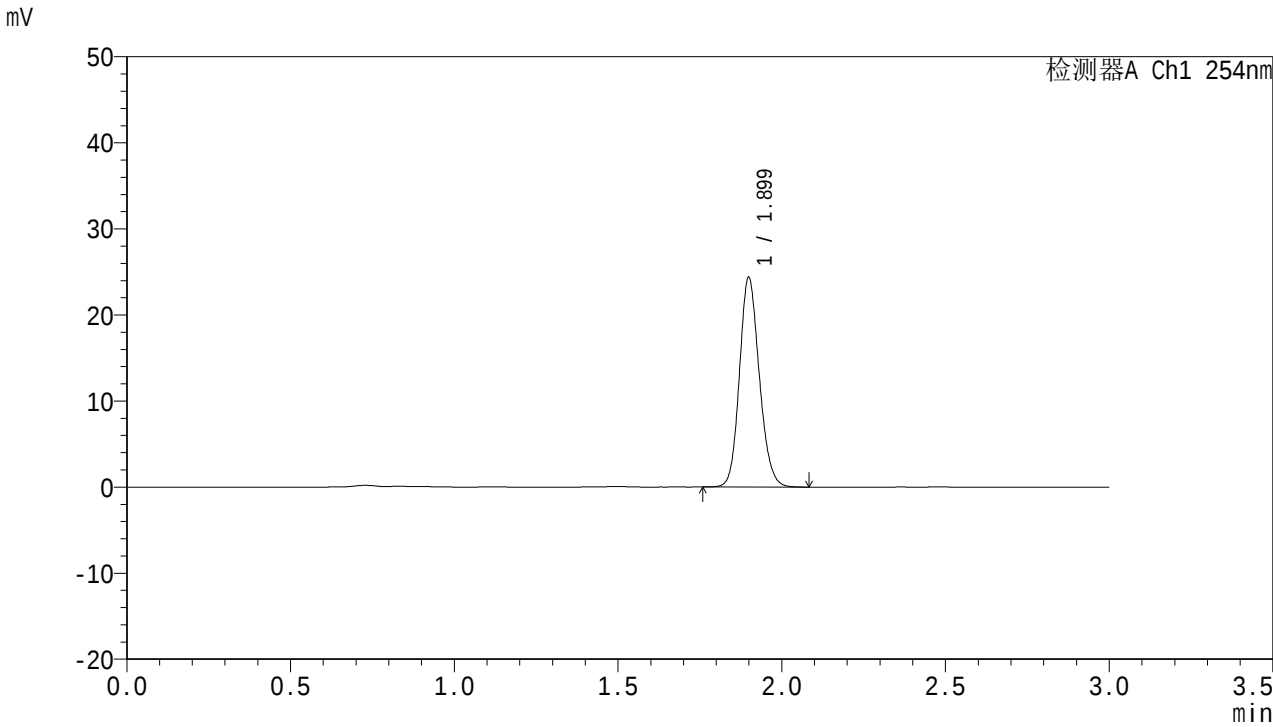

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	102715	100.000	24271	4724	1.148	--
总计		102715	100.000	24271			

图25 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1014-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-13

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 12:21:52

处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:21


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

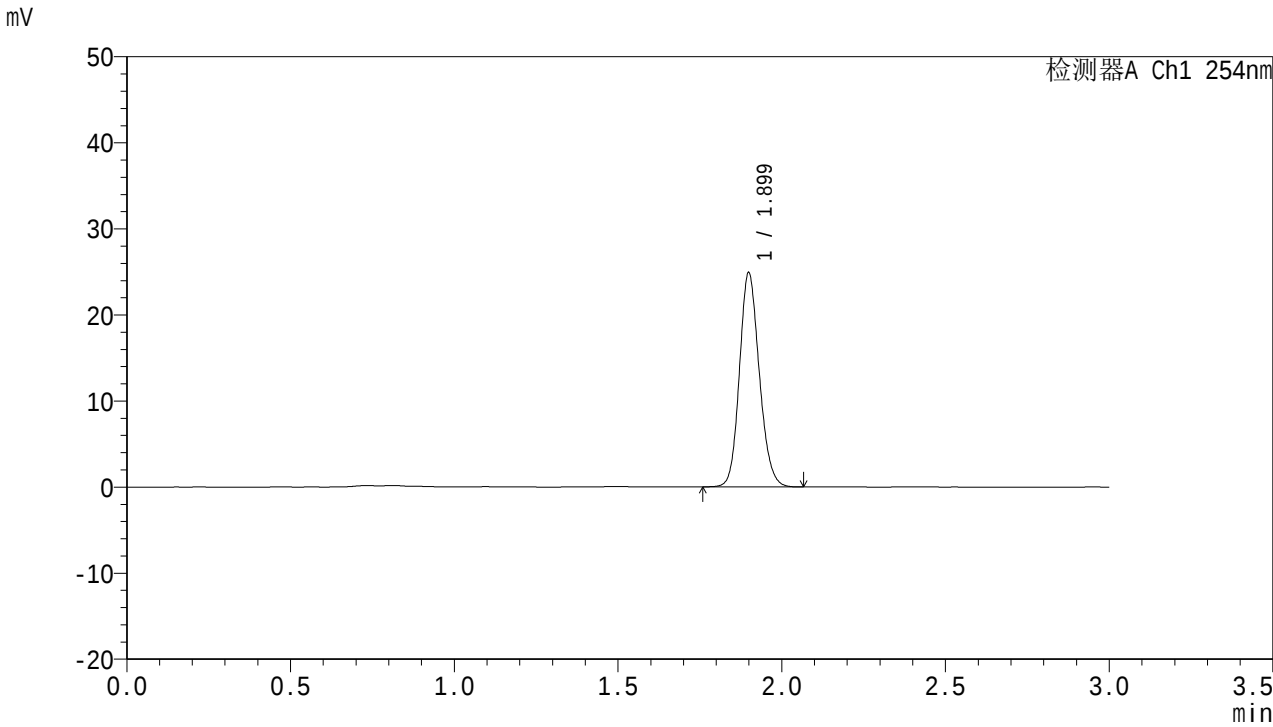

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	104896	100.000	24805	4732	1.149	--
总计		104896	100.000	24805			

图26 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1015-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：1-22
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 12:25:18
处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:23
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>

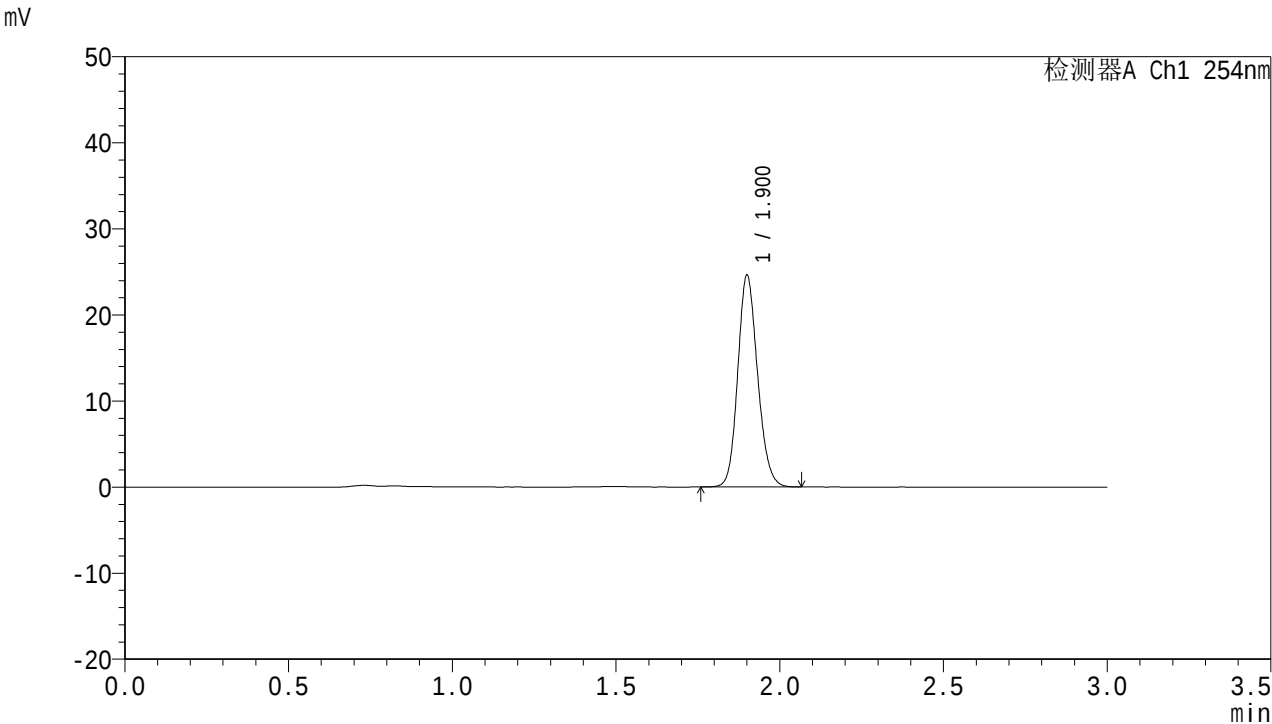

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	103598	100.000	24430	4744	1.151	--
总计		103598	100.000	24430			

图27 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1016-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-31

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 12:28:42

处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:26


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

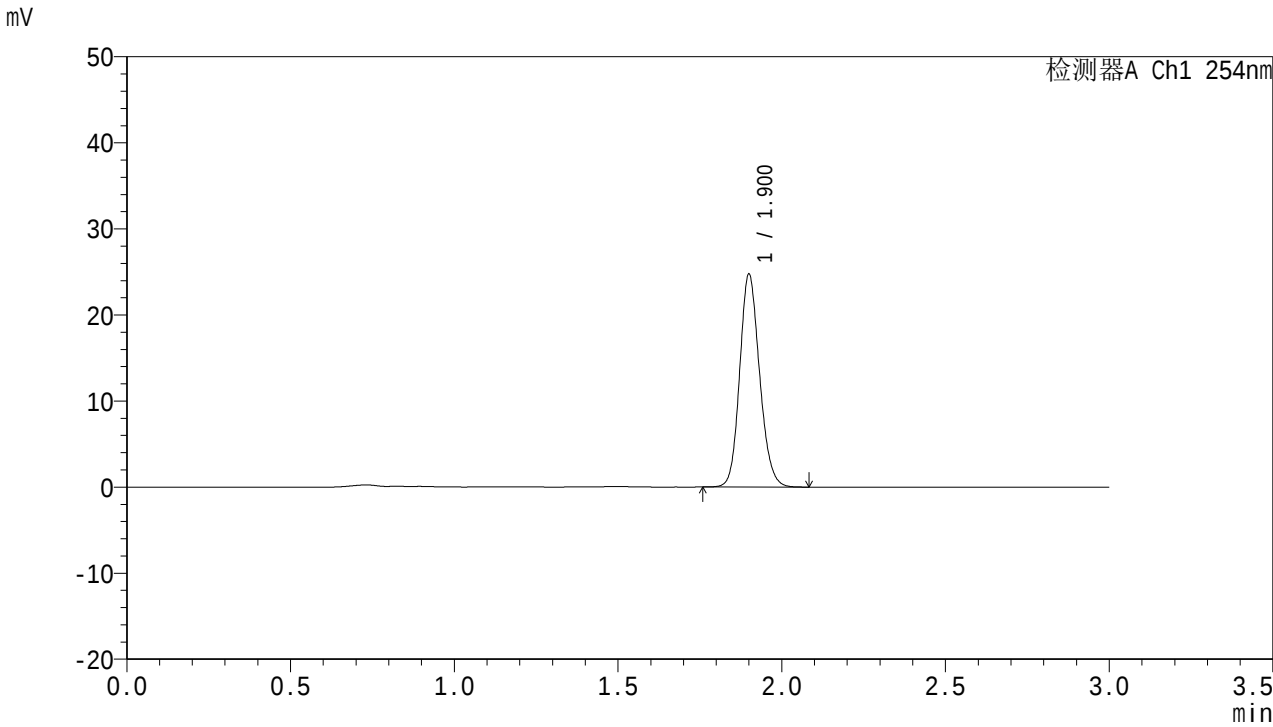

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	104492	100.000	24584	4720	1.149	--
总计		104492	100.000	24584			

图28 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1017-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-40

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 12:32:07

处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:29


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

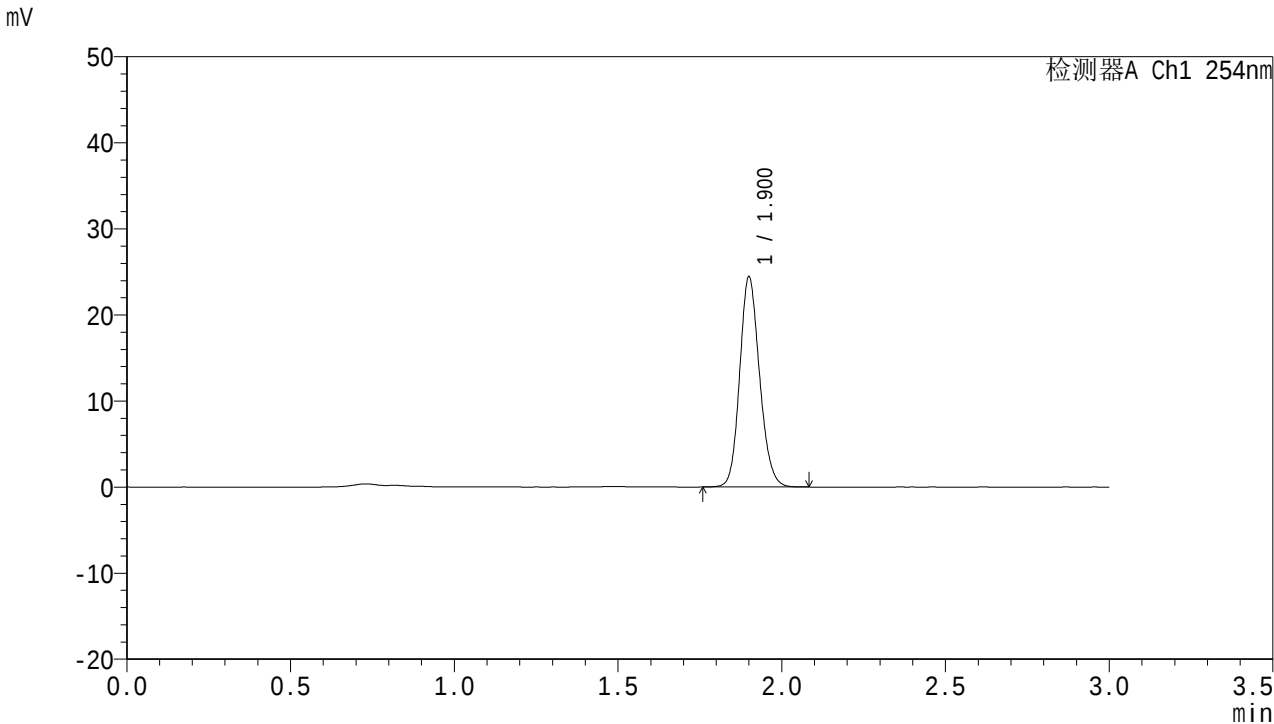

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	103040	100.000	24267	4729	1.149	--
总计		103040	100.000	24267			

图29 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1018-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-49

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 12:35:32

处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:32


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

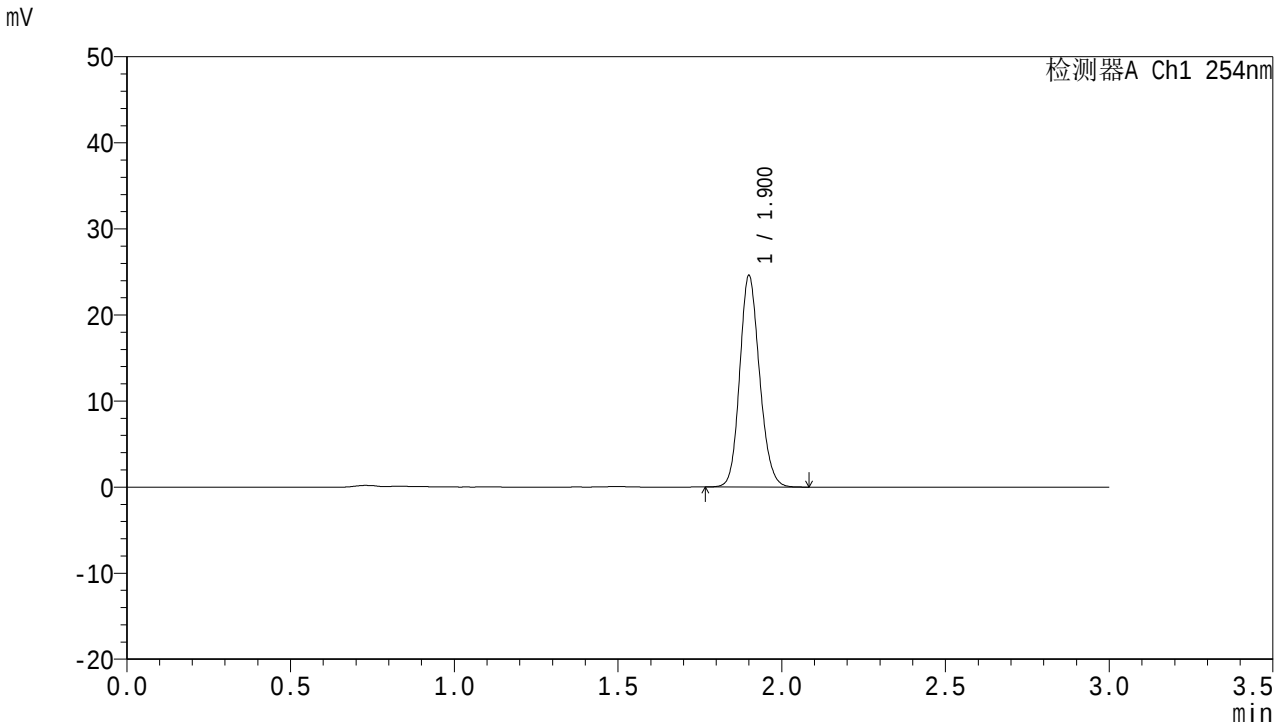

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	103586	100.000	24426	4743	1.148	--
总计		103586	100.000	24426			

图30 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1019-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-5

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 12:38:57

处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:35


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

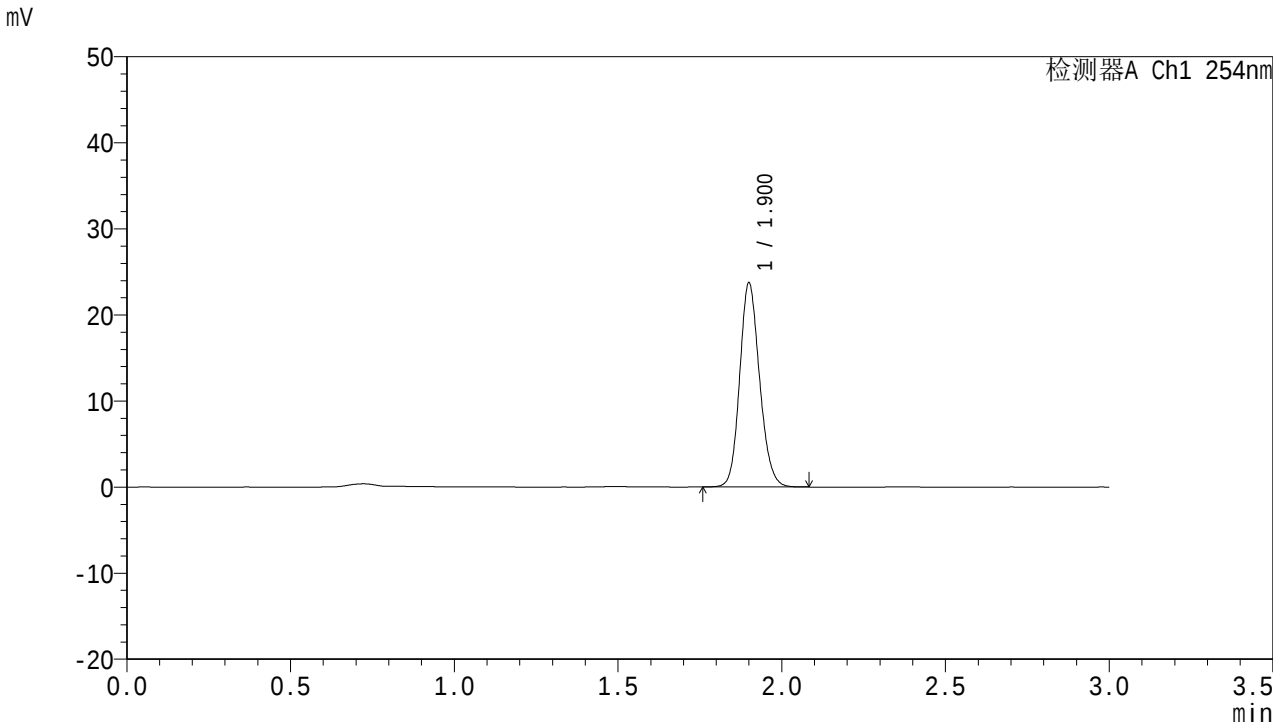

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	99995	100.000	23570	4730	1.149	--
总计		99995	100.000	23570			

图31 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1020-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-14

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 12:42:22

处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:38


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

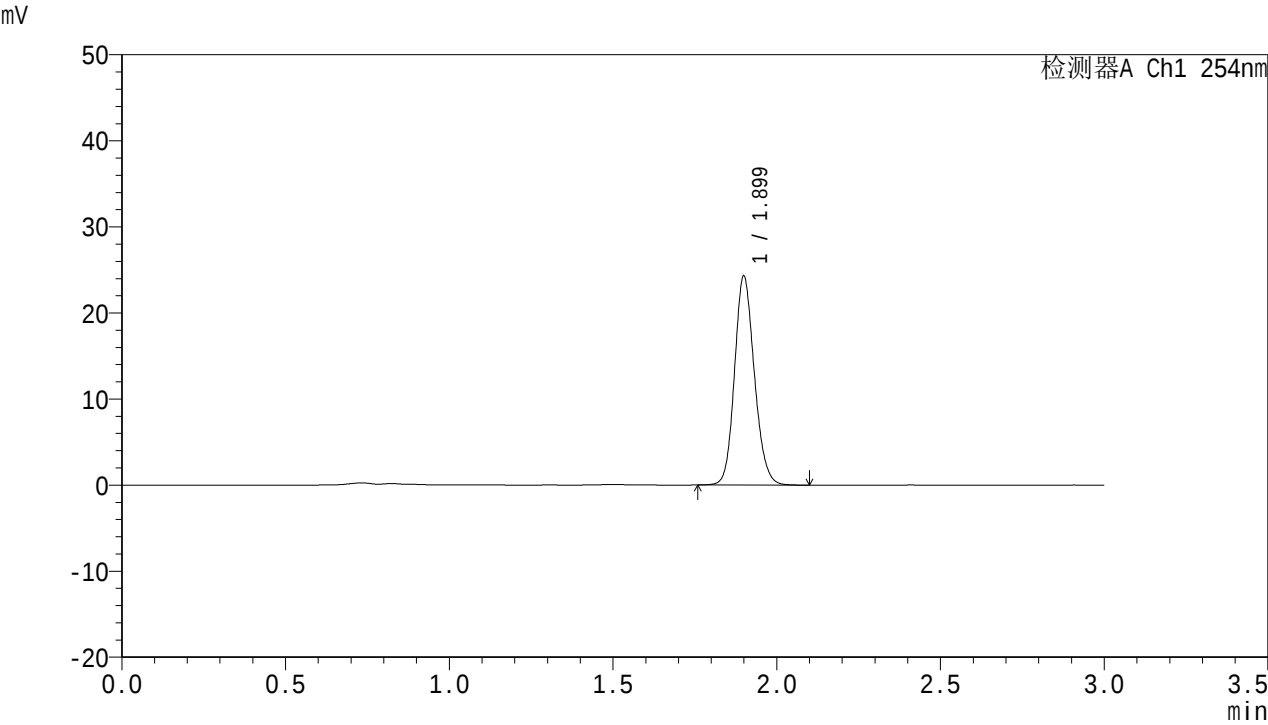

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	102410	100.000	24184	4732	1.148	--
总计		102410	100.000	24184			

图32 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1021-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-23

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 12:45:47

处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:41


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

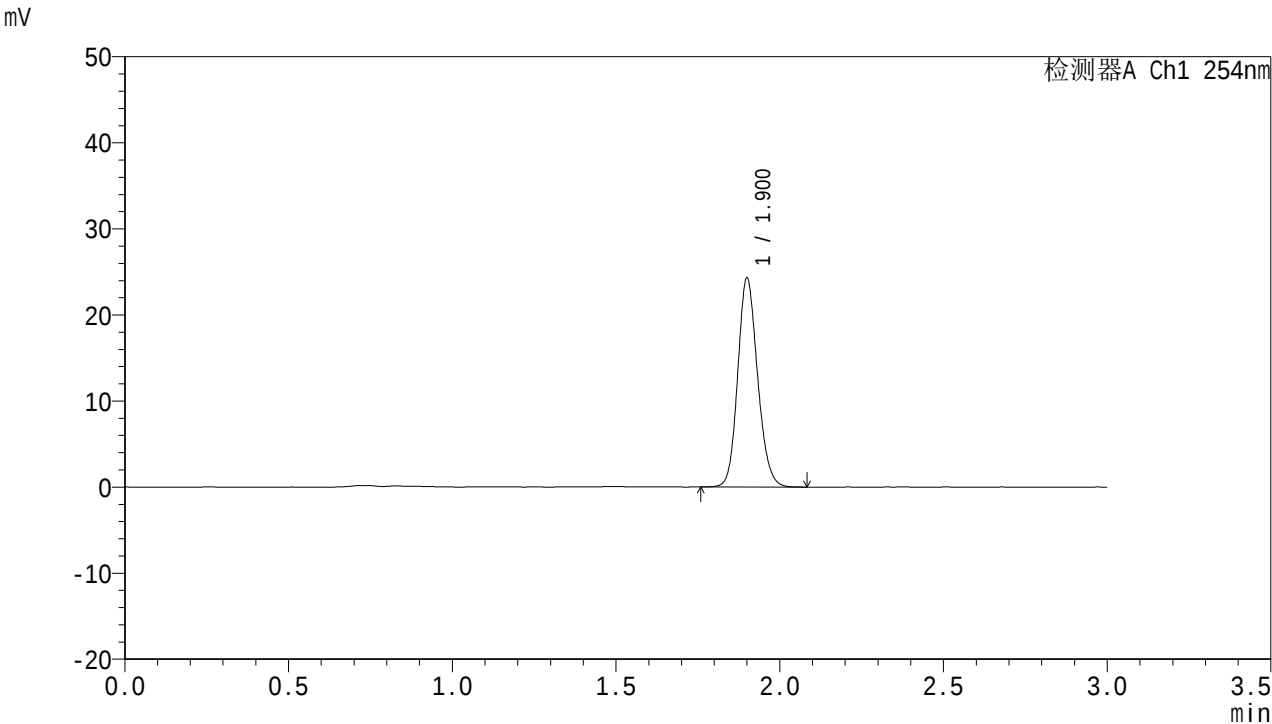

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	102382	100.000	24119	4738	1.147	--
总计		102382	100.000	24119			

图33 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1022-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-32

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 12:49:12

处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:44


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

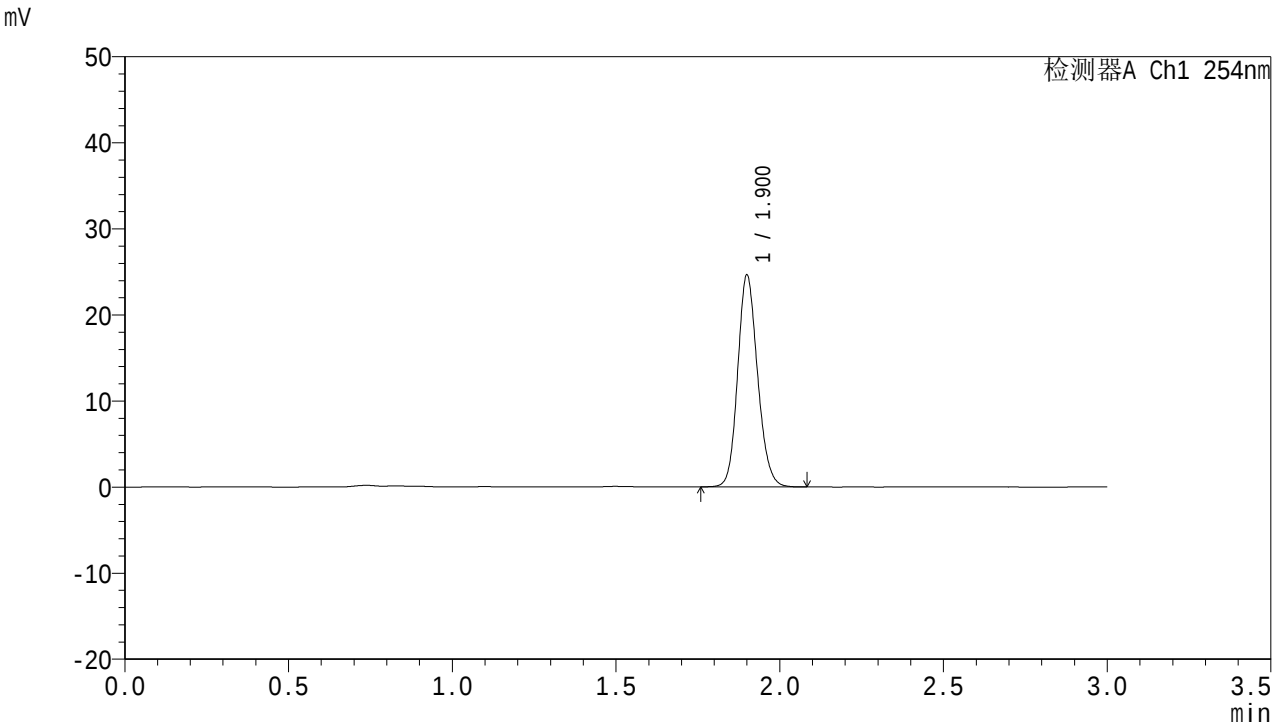

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	104045	100.000	24477	4725	1.148	--
总计		104045	100.000	24477			

图34 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1023-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-41

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 12:52:37

处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:46


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

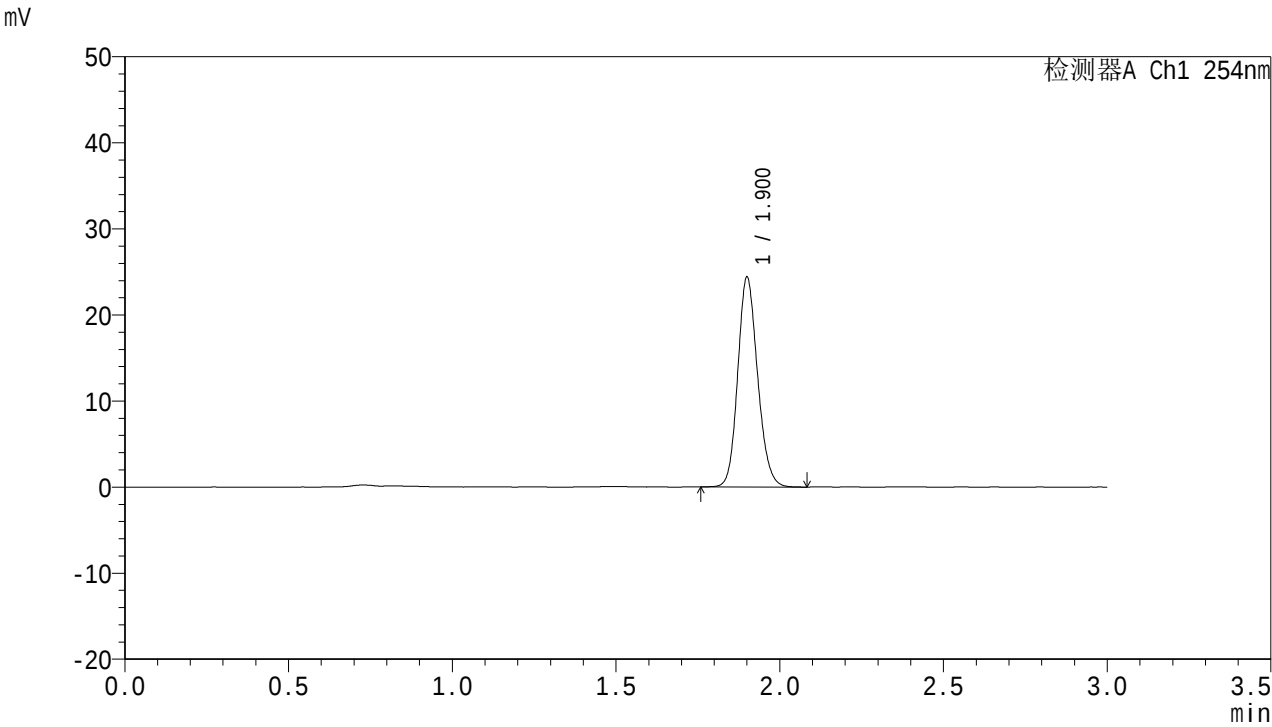

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	102823	100.000	24210	4734	1.150	--
总计		102823	100.000	24210			

图35 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1024-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：1-50
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 12:56:02
处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:49
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>

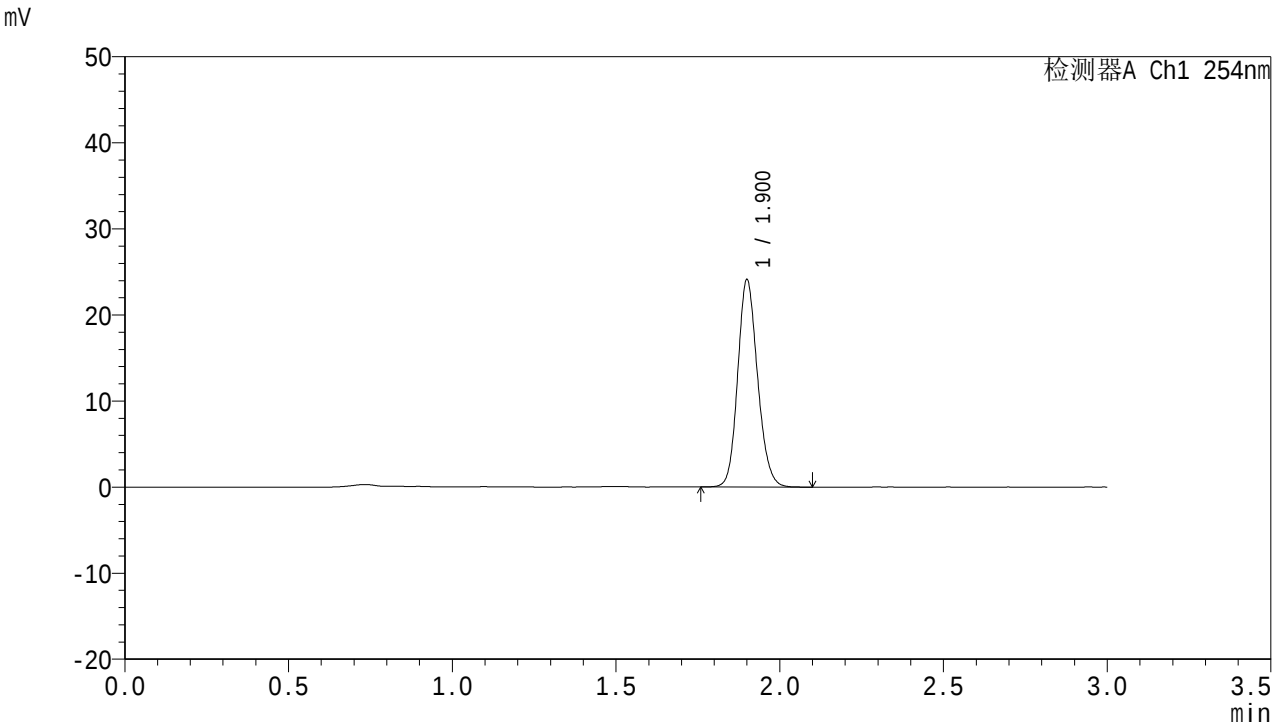

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	101645	100.000	23943	4732	1.149	--
总计		101645	100.000	23943			

图36 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1025-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：1-6
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 12:59:27 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:52 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

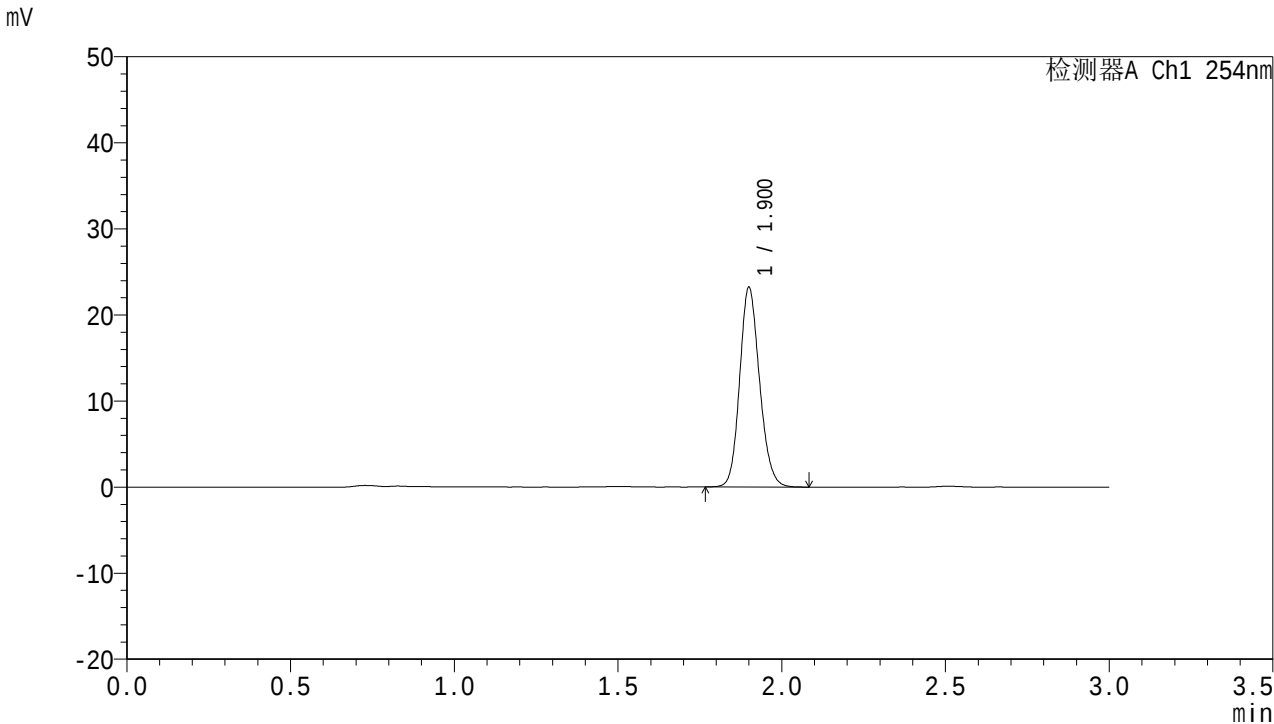

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	97833	100.000	23062	4730	1.150	--
总计		97833	100.000	23062			

图37 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1026-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-15

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 13:02:53

处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:55


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

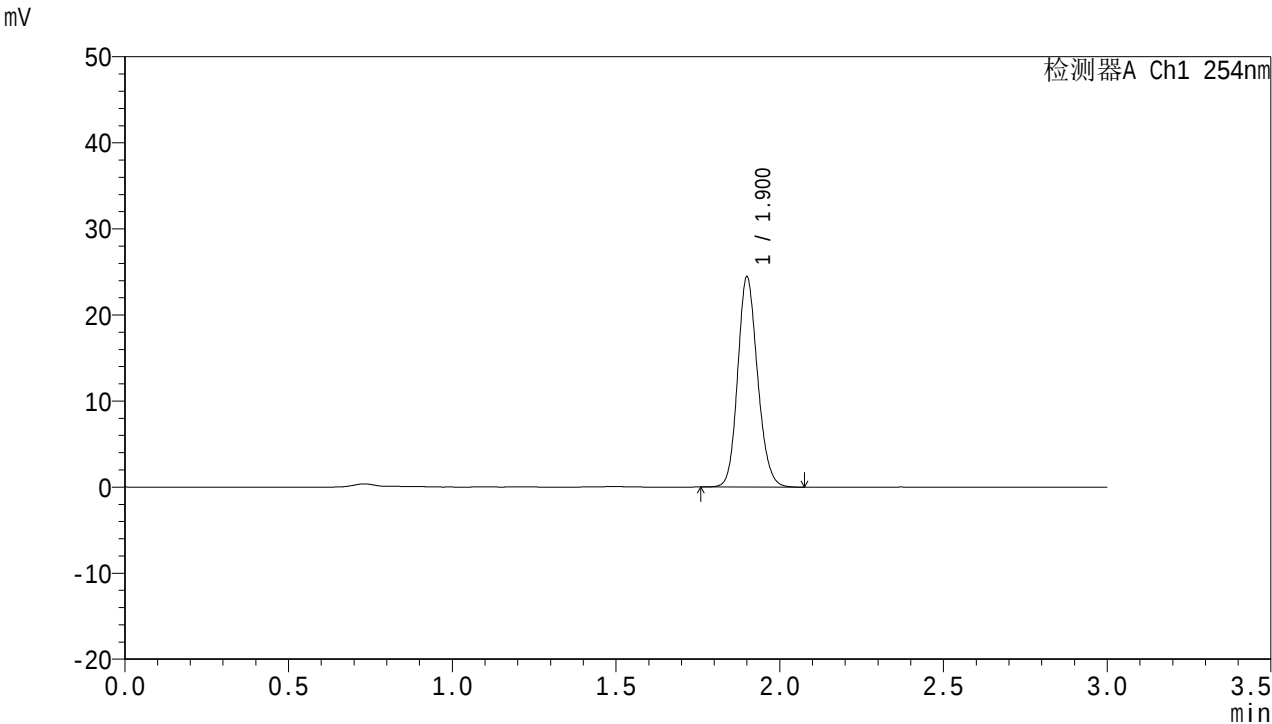

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	103212	100.000	24283	4725	1.150	--
总计		103212	100.000	24283			

图38 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1027-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-24

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 13:06:19

处理时间(V2)：2025/01/14 08:26:58


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

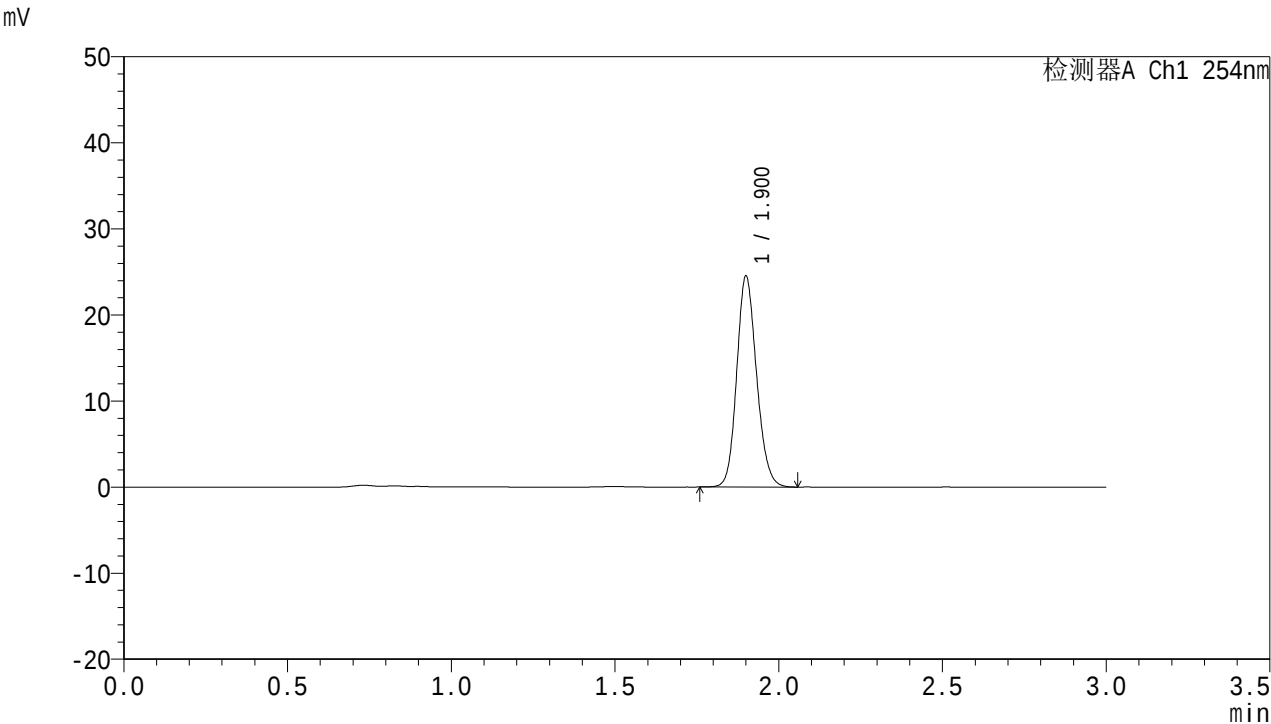

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	103324	100.000	24348	4736	1.149	--
总计		103324	100.000	24348			

图39 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1028-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-33

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 13:09:45

处理时间(V2)：2025/01/14 08:27:01


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

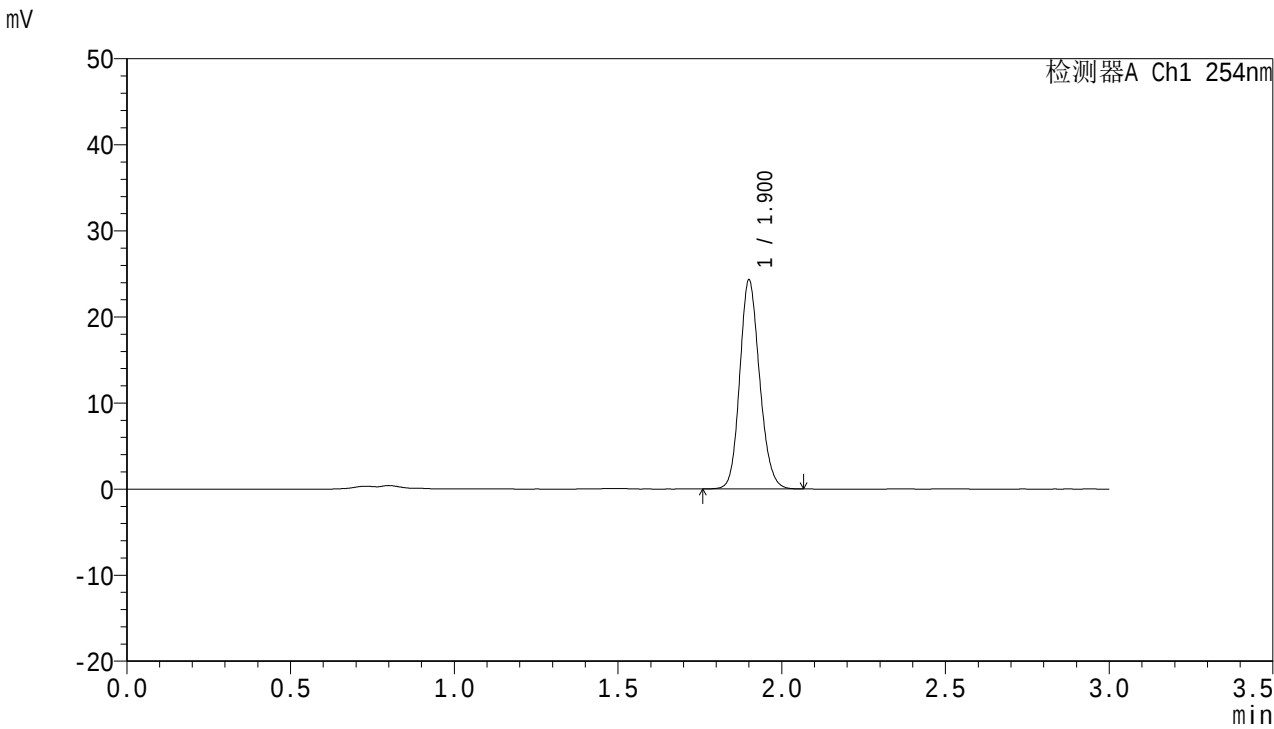

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	102381	100.000	24125	4740	1.150	--
总计		102381	100.000	24125			

图40 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1029-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：1-42
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 13:13:10 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:27:04 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

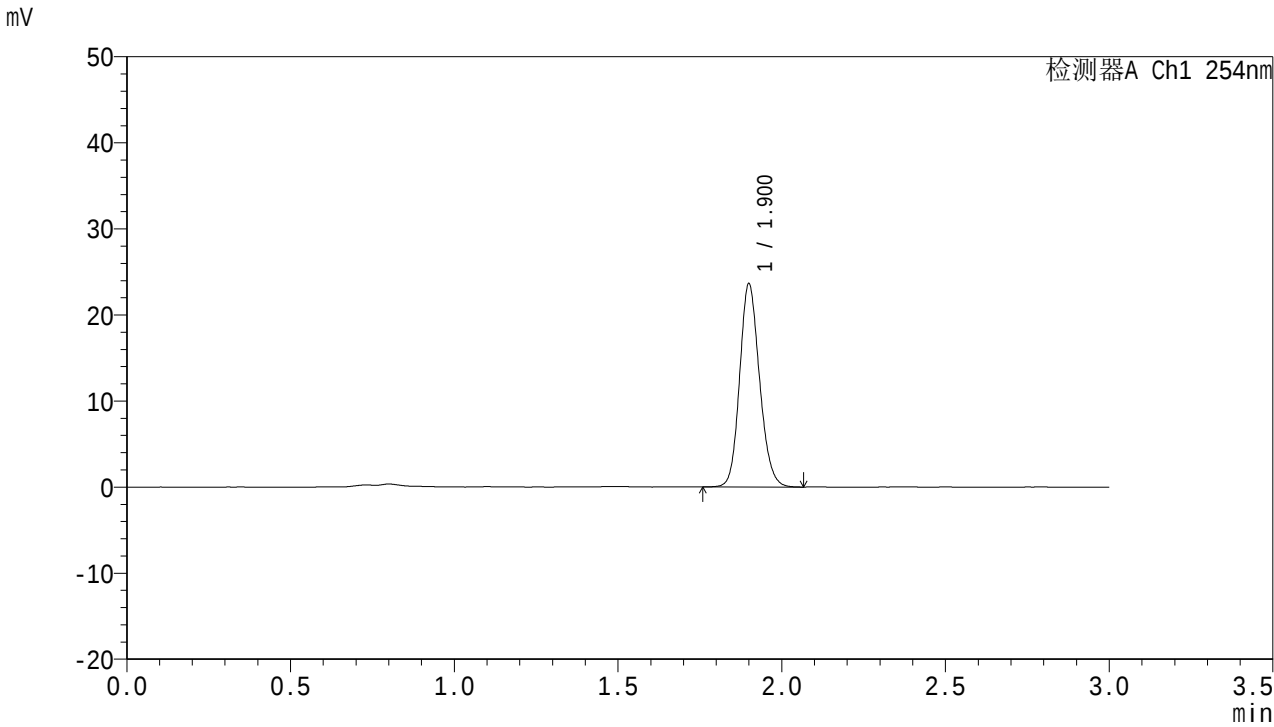

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	99747	100.000	23481	4712	1.150	--
总计		99747	100.000	23481			

图41 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1030-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-51

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 13:16:35

处理时间(V2)：2025/01/14 08:27:07


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

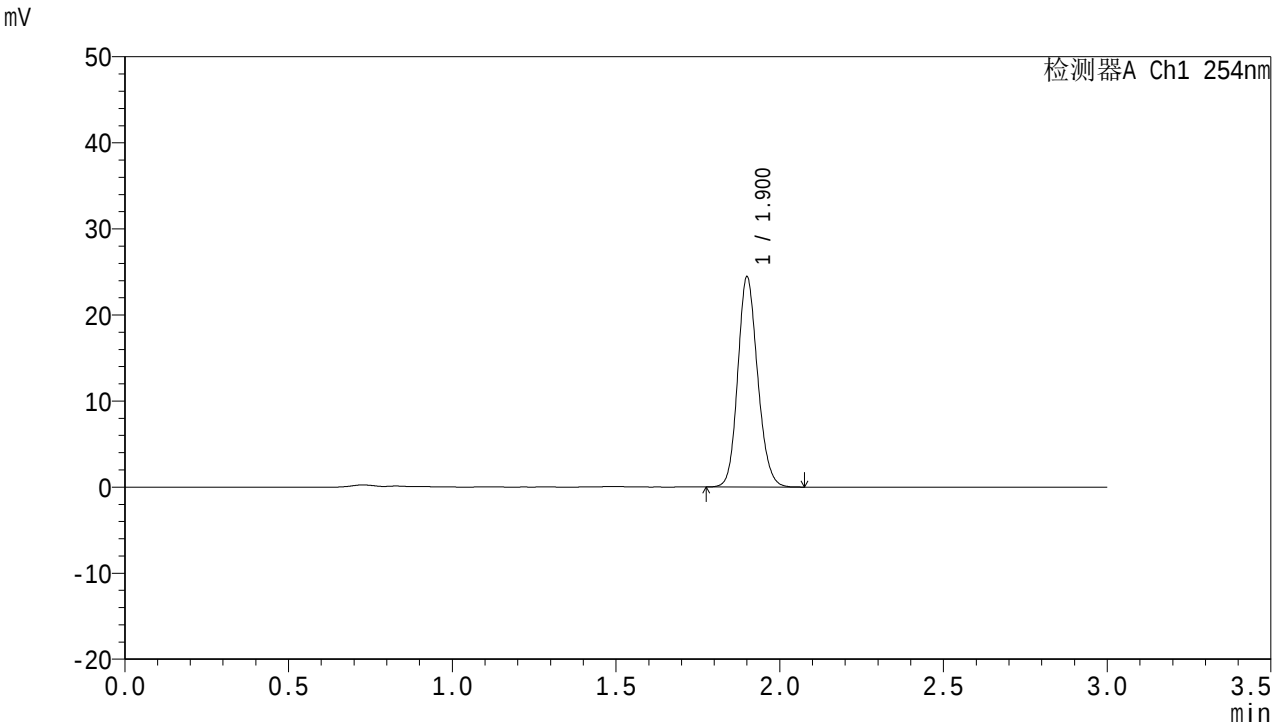

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	102894	100.000	24248	4741	1.148	--
总计		102894	100.000	24248			

图42 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1031-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-7

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 13:20:00

处理时间(V2)：2025/01/14 08:27:10


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

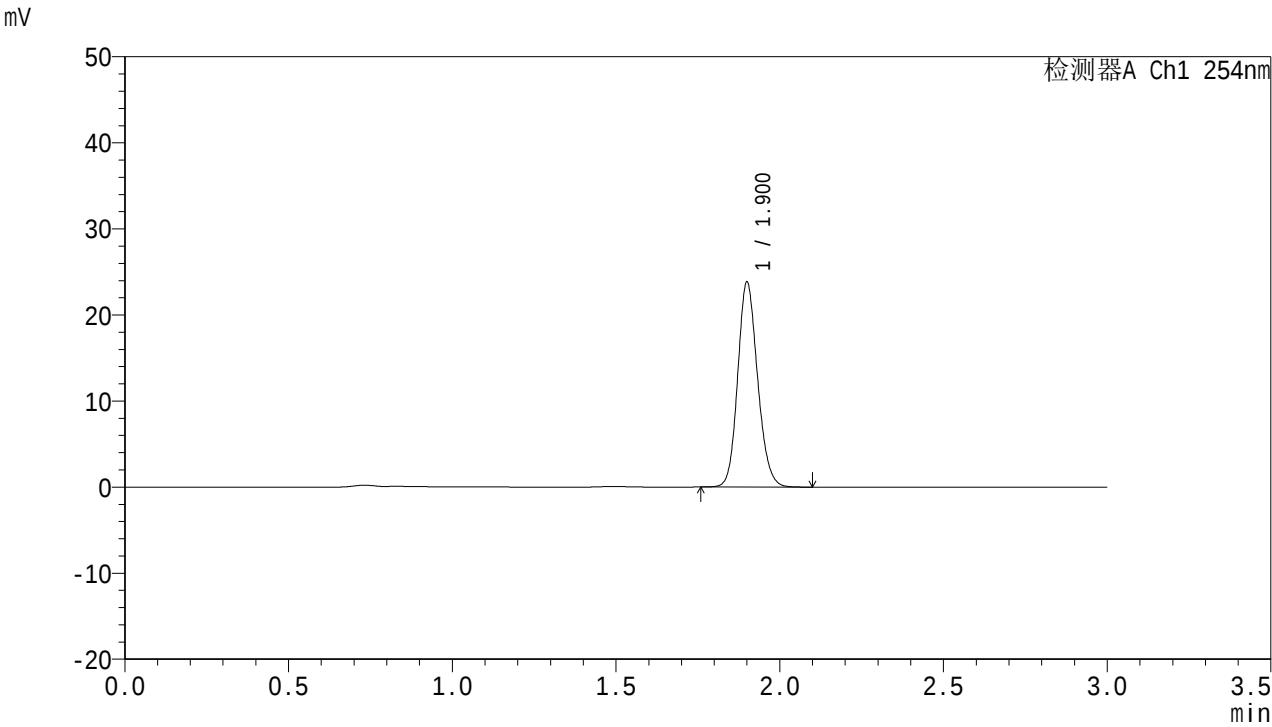

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	100638	100.000	23671	4728	1.149	--
总计		100638	100.000	23671			

图43 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1032-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-16

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 13:23:25

处理时间(V2)：2025/01/14 08:27:13


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

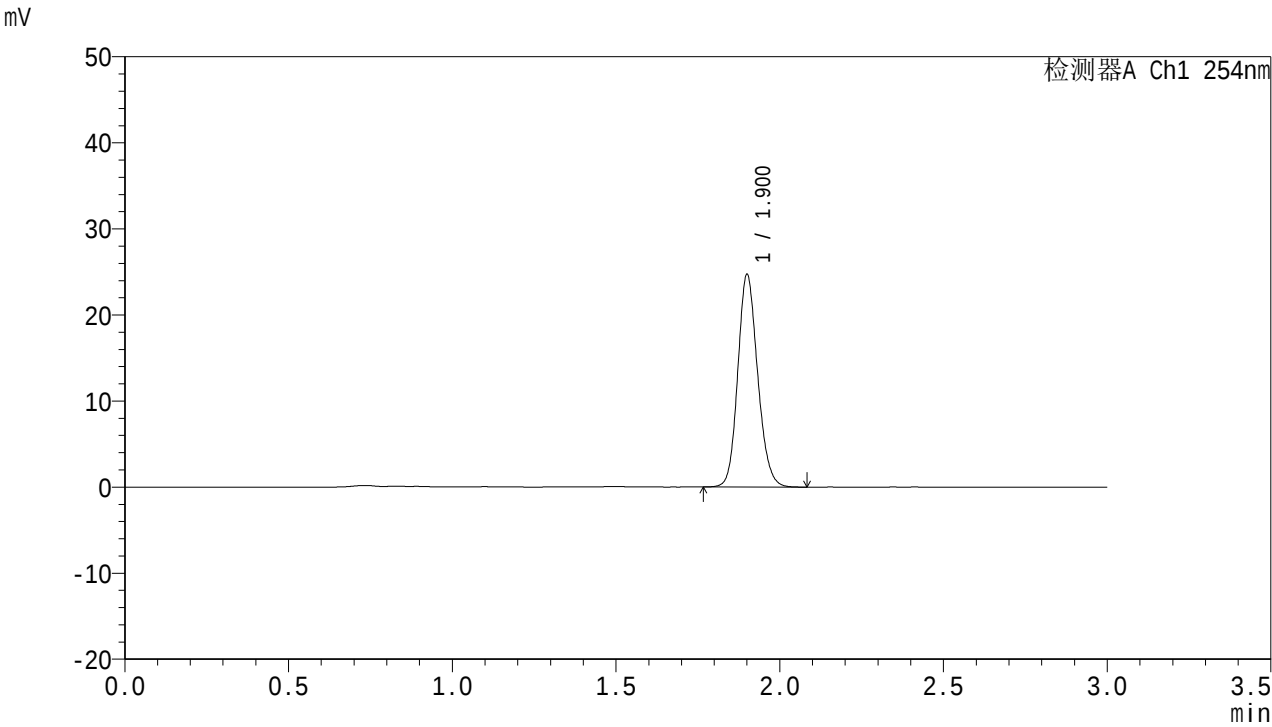

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	104074	100.000	24512	4740	1.149	--
总计		104074	100.000	24512			

图44 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1033-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：1-25
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 13:26:50
处理时间(V2)：2025/01/14 08:27:16
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>

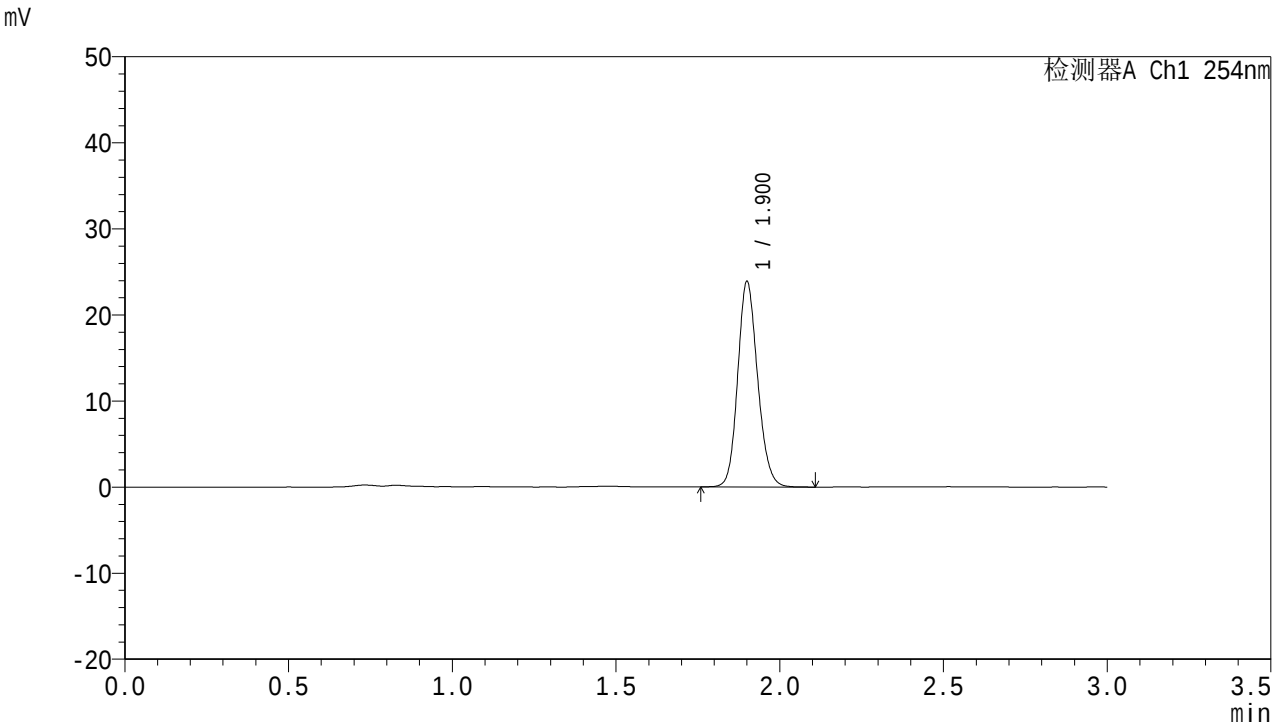

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	100970	100.000	23720	4724	1.149	--
总计		100970	100.000	23720			

图45 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1034-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-34

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 13:30:15

处理时间(V2)：2025/01/14 08:27:19


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

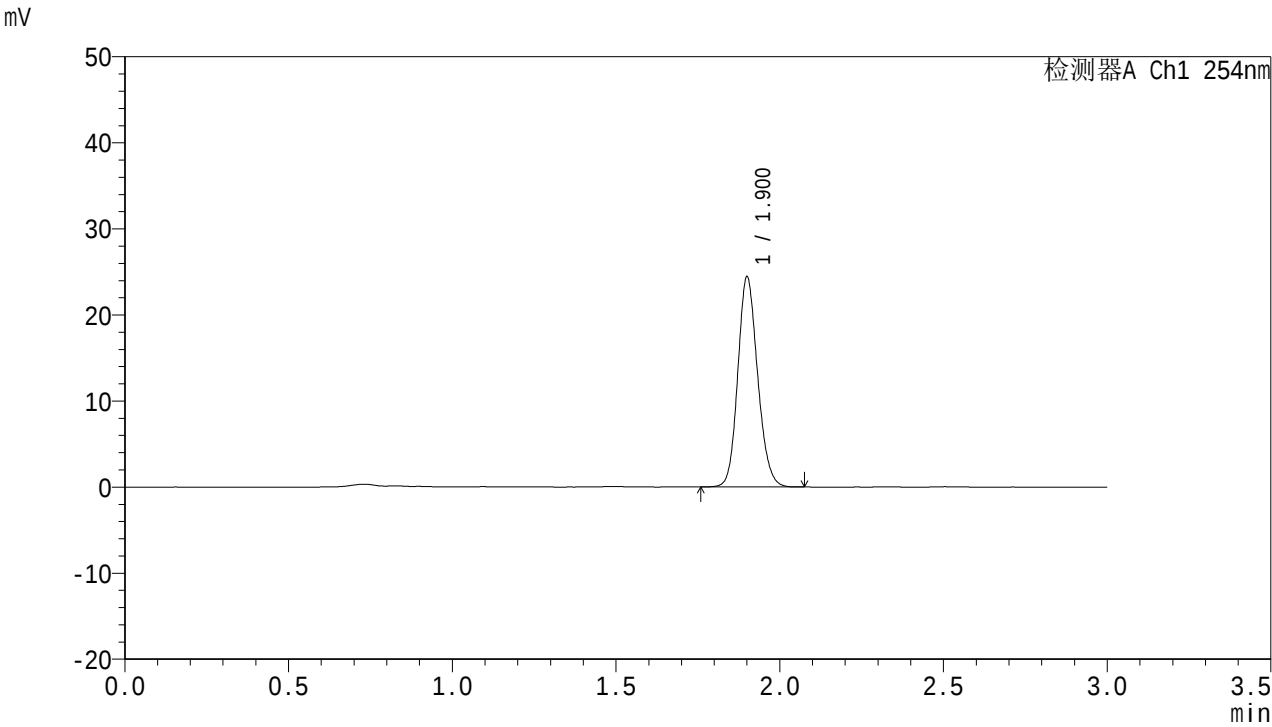

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	102784	100.000	24226	4745	1.149	--
总计		102784	100.000	24226			

图46 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1035-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-43

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 13:33:40

处理时间(V2)：2025/01/14 08:27:22


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

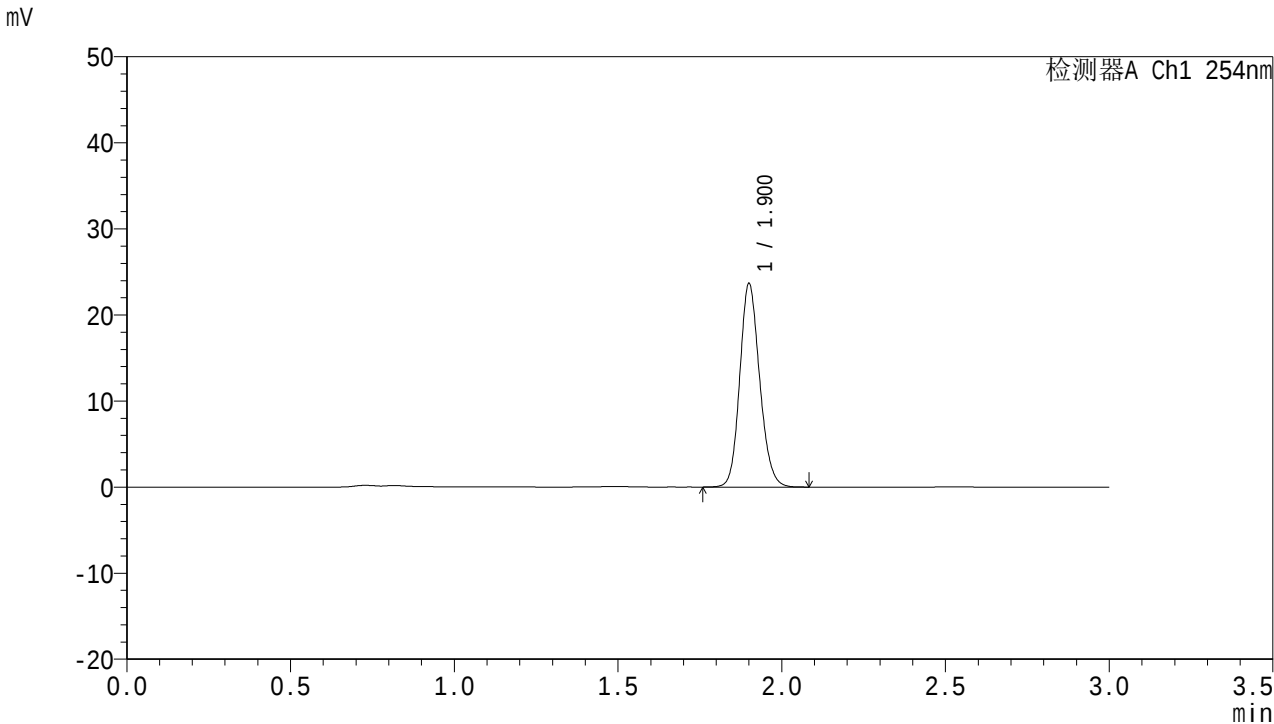

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	99930	100.000	23477	4726	1.150	--
总计		99930	100.000	23477			

图47 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1036-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-52

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 13:37:05

处理时间(V2)：2025/01/14 08:27:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

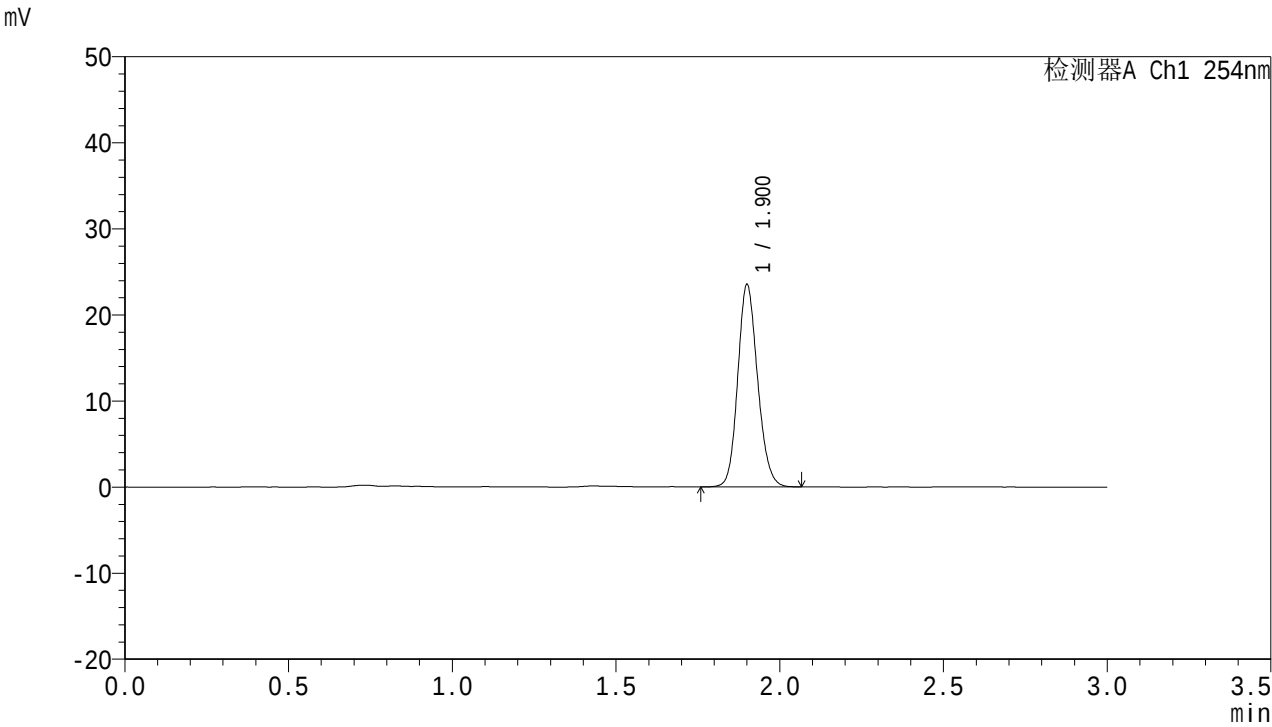

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	99109	100.000	23352	4734	1.147	--
总计		99109	100.000	23352			

图48 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1037-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：1-8
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 13:40:31 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:27:27 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

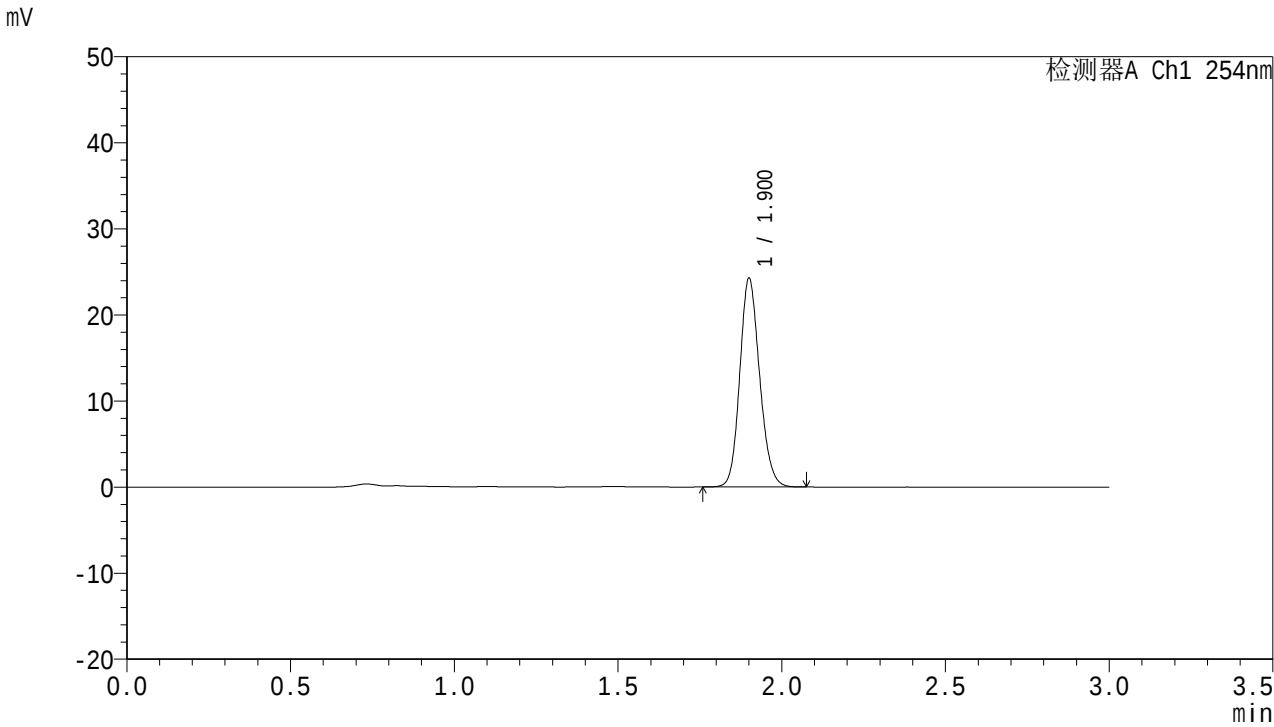

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	102140	100.000	24073	4736	1.148	--
总计		102140	100.000	24073			

图49 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1038-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-17

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 13:43:57

处理时间(V2)：2025/01/14 08:27:30

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

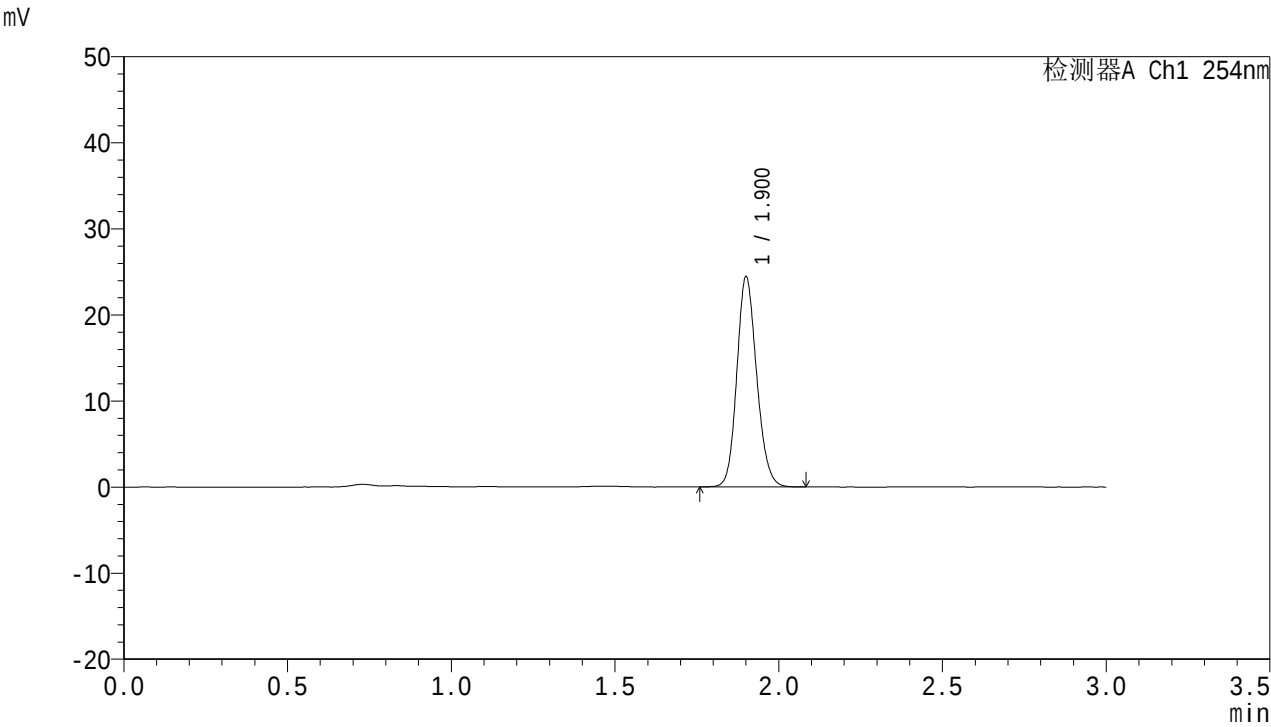

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	102885	100.000	24231	4744	1.150	--
总计		102885	100.000	24231			

图50 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1039-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-26

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 13:47:23

处理时间(V2)：2025/01/14 08:27:33


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

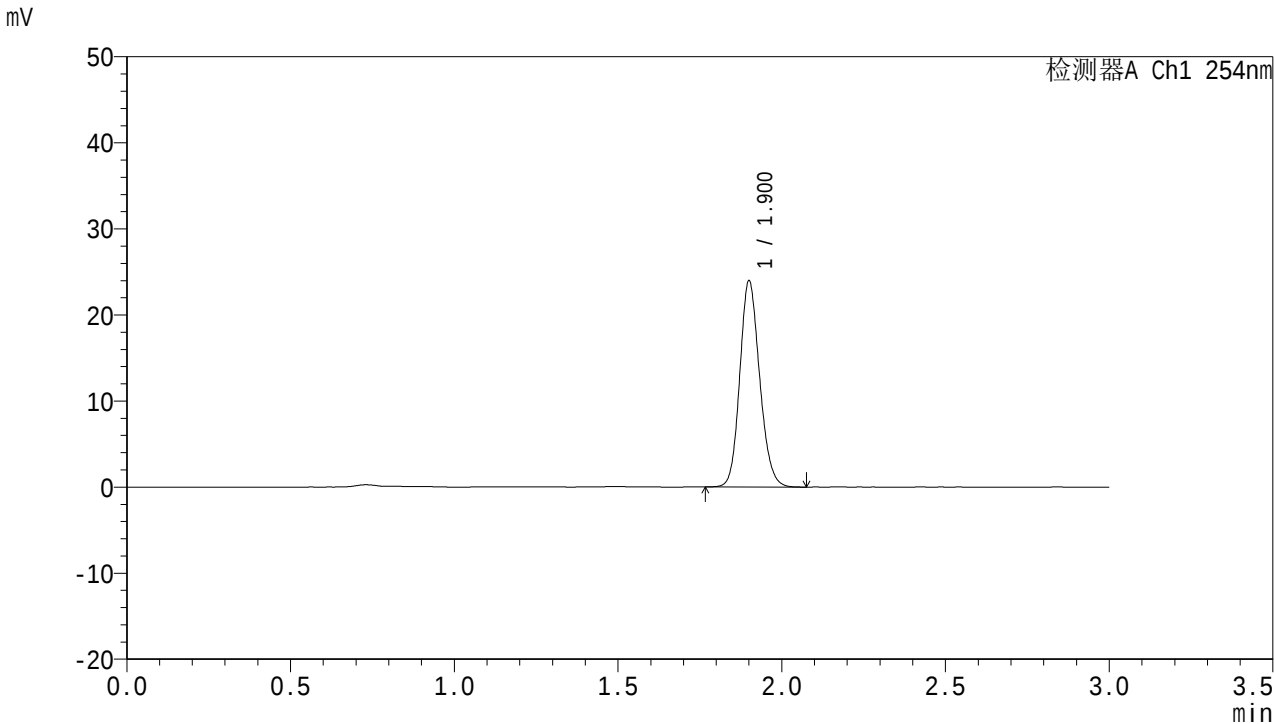

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	101076	100.000	23785	4729	1.149	--
总计		101076	100.000	23785			

图51 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1040-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-35

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 13:50:49

处理时间(V2)：2025/01/14 08:27:36

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

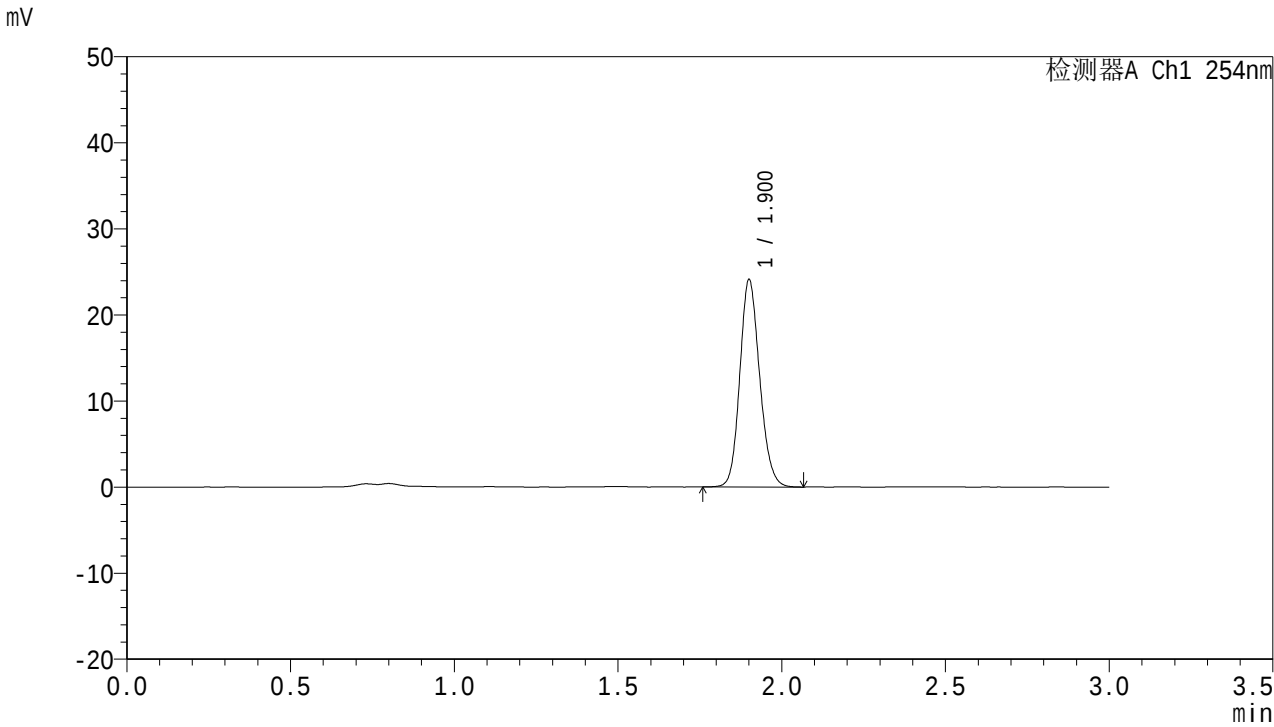

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	101639	100.000	23907	4738	1.149	--
总计		101639	100.000	23907			

图52 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1041-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：1-44
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 13:54:15
处理时间(V2)：2025/01/14 08:27:39
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>

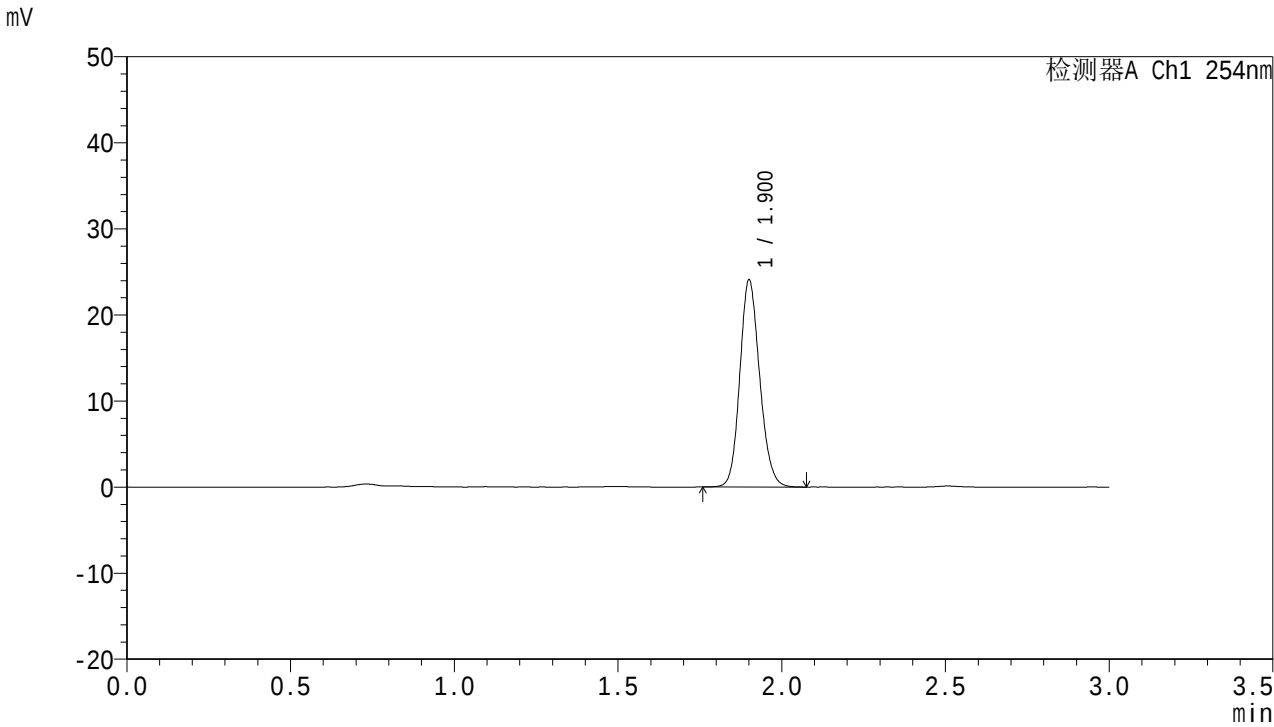

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	101487	100.000	23871	4732	1.149	--
总计		101487	100.000	23871			

图53 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1042-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-53

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 13:57:41

处理时间(V2)：2025/01/14 08:27:42


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

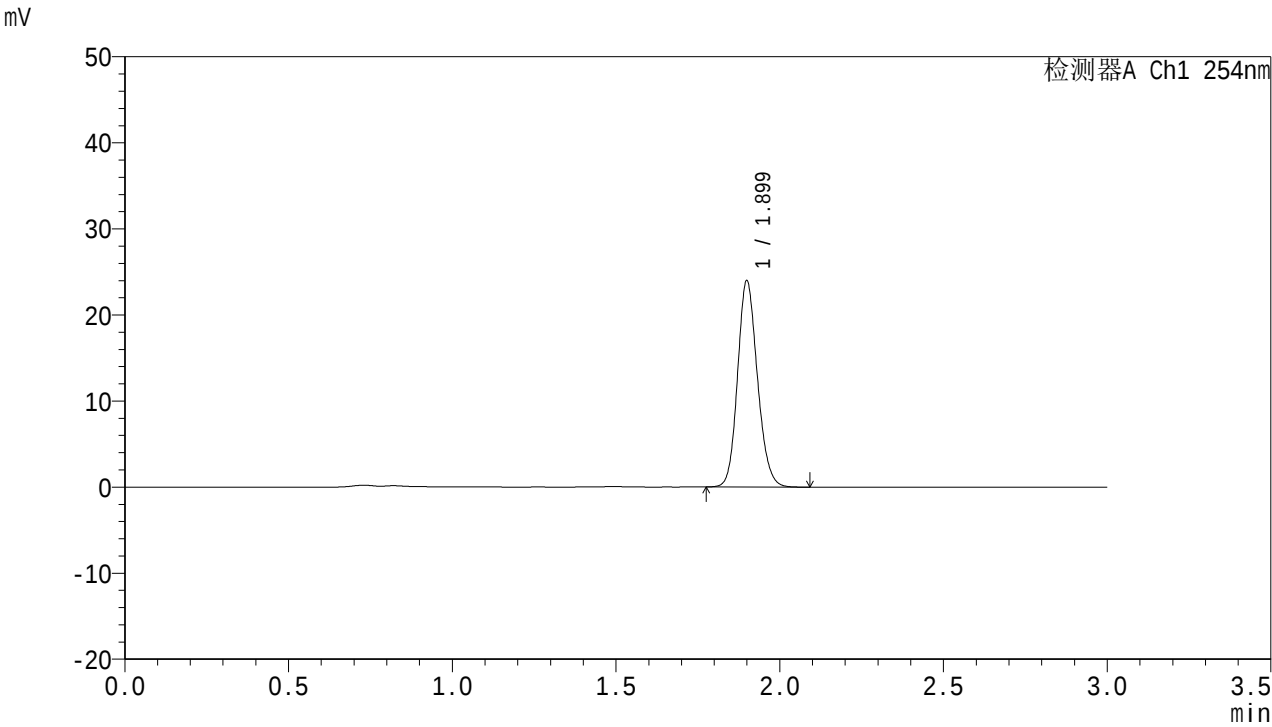

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	101107	100.000	23872	4730	1.150	--
总计		101107	100.000	23872			

图54 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1043-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 14:01:06 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:27:44 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

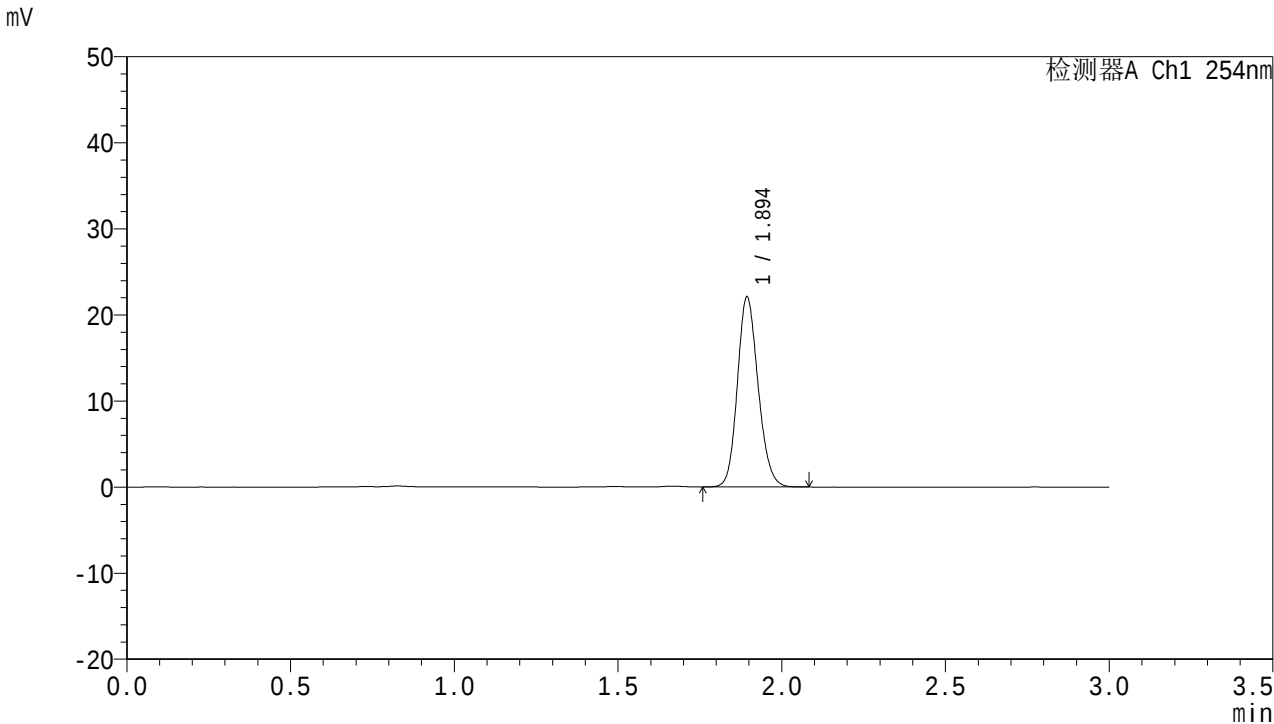

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	97449	100.000	21974	4288	1.152	--
总计		97449	100.000	21974			

图55 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-106/11-1044-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：1-27

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 14:04:32

处理时间(V2)：2025/01/14 08:27:47


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

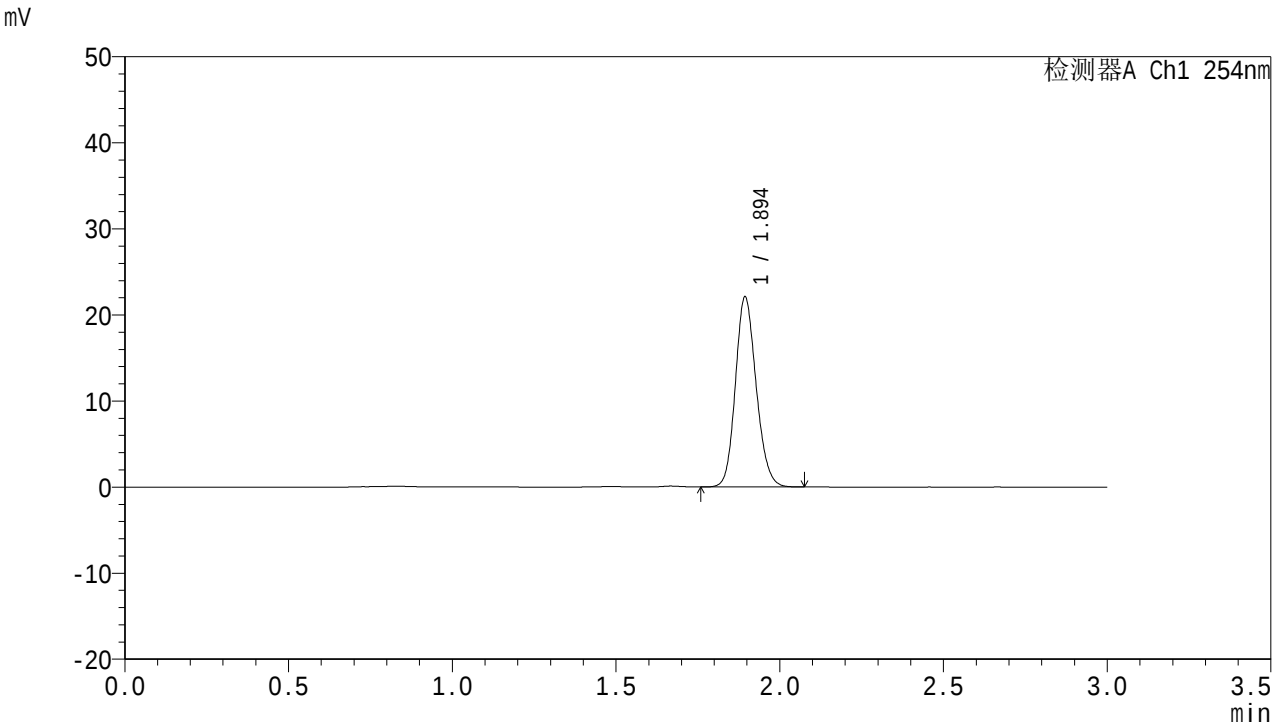

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	97473	100.000	21988	4284	1.150	--
总计		97473	100.000	21988			

图56 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1045-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-rj.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-9
: 50 μl
: 2025/01/13 14:08:00
: 2025/01/14 08:27:50
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

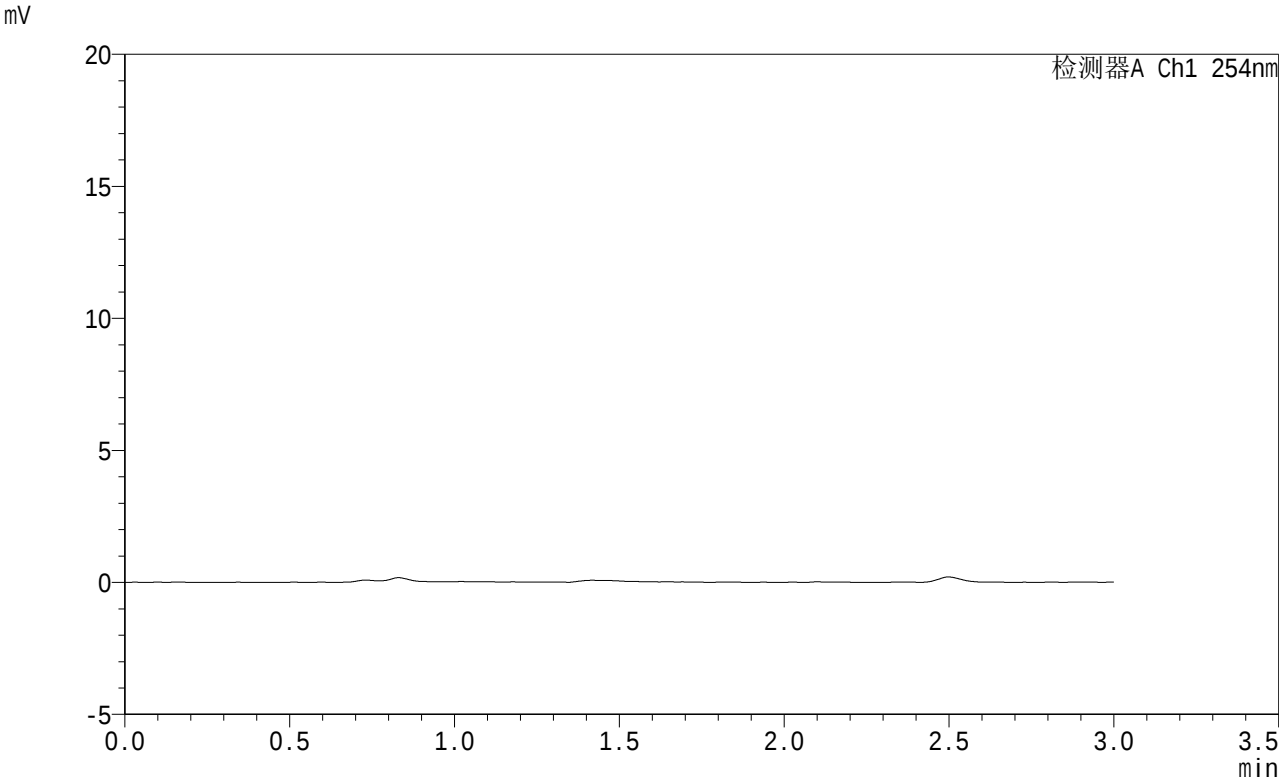

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1046-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 14:11:27

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:27:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

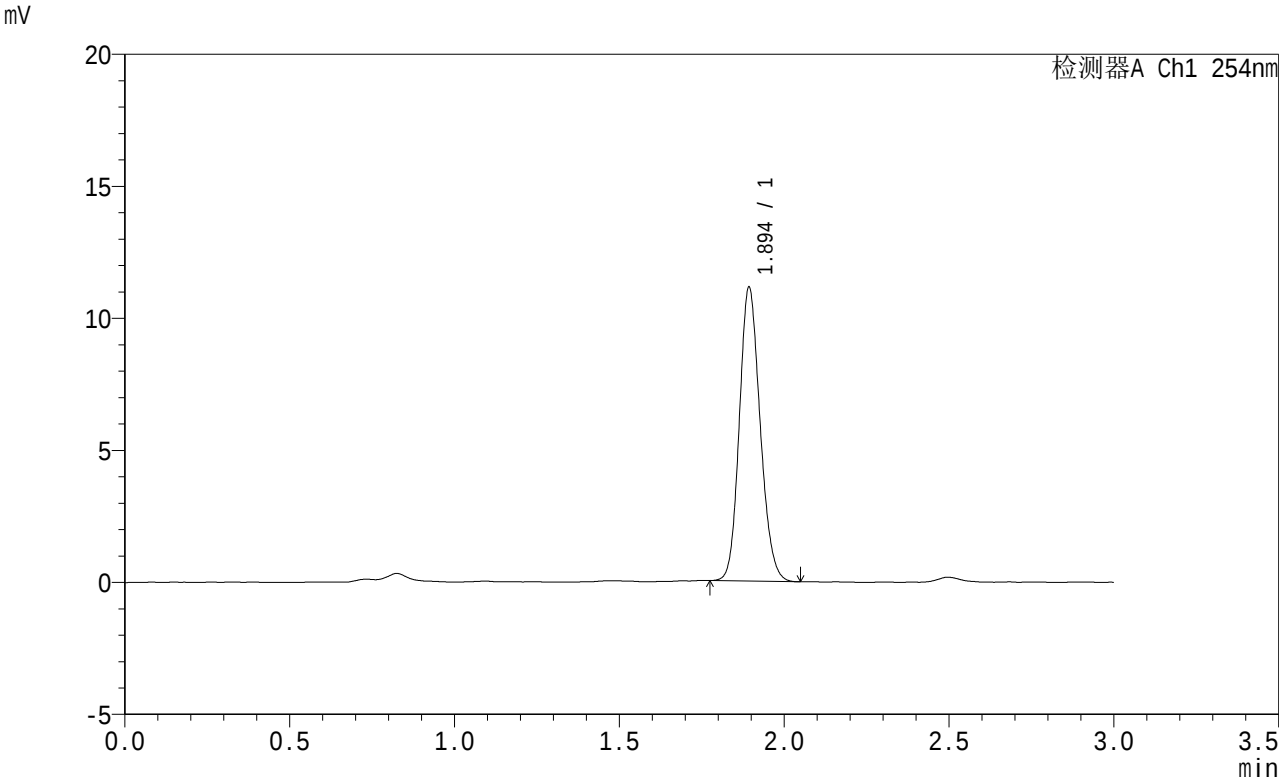

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	48873	100.000	11063	4296	1.151	--
总计		48873	100.000	11063			

图58 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1047-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-dz1-2.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-18
: 50 μl
: 2025/01/13 14:14:54
: 2025/01/14 08:27:56
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

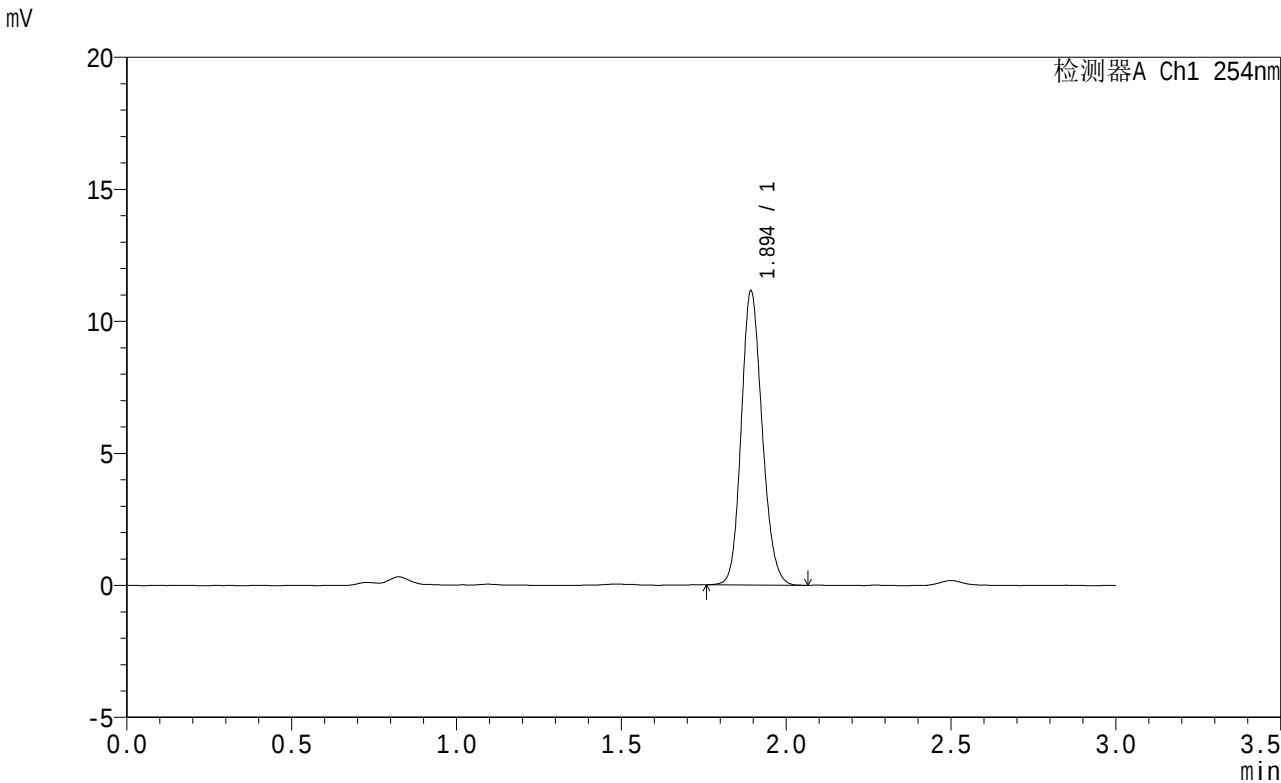

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	49184	100.000	11067	4274	1.152	--
总计		49184	100.000	11067			

图59 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1048-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 14:18:21

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:27:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

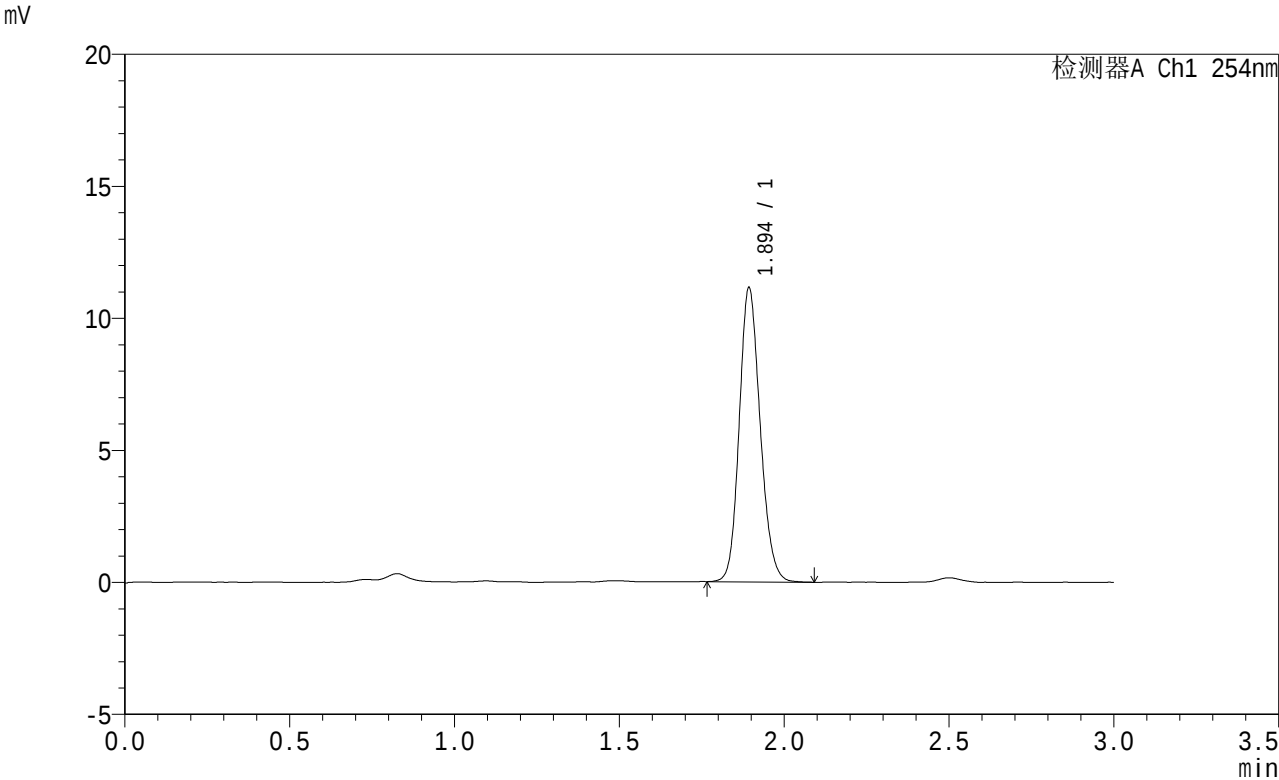

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	49274	100.000	11072	4281	1.153	--
总计		49274	100.000	11072			

图60 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1049-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/13 14:21:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2025/01/14 08:28:01 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

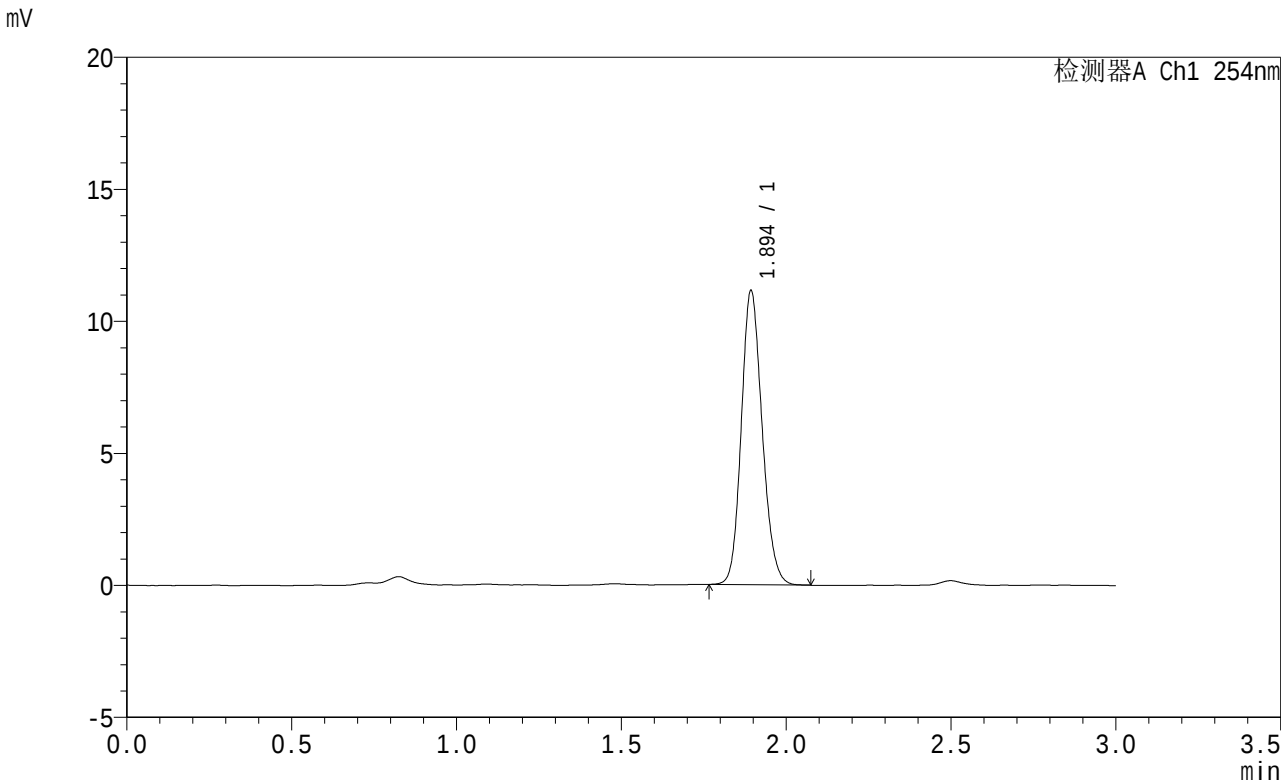

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	49040	100.000	11071	4297	1.153	--
总计		49040	100.000	11071			

图61 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1050-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-dz1-5.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-18
: 50 μl
: 2025/01/13 14:25:15
: 2025/01/14 08:28:04
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

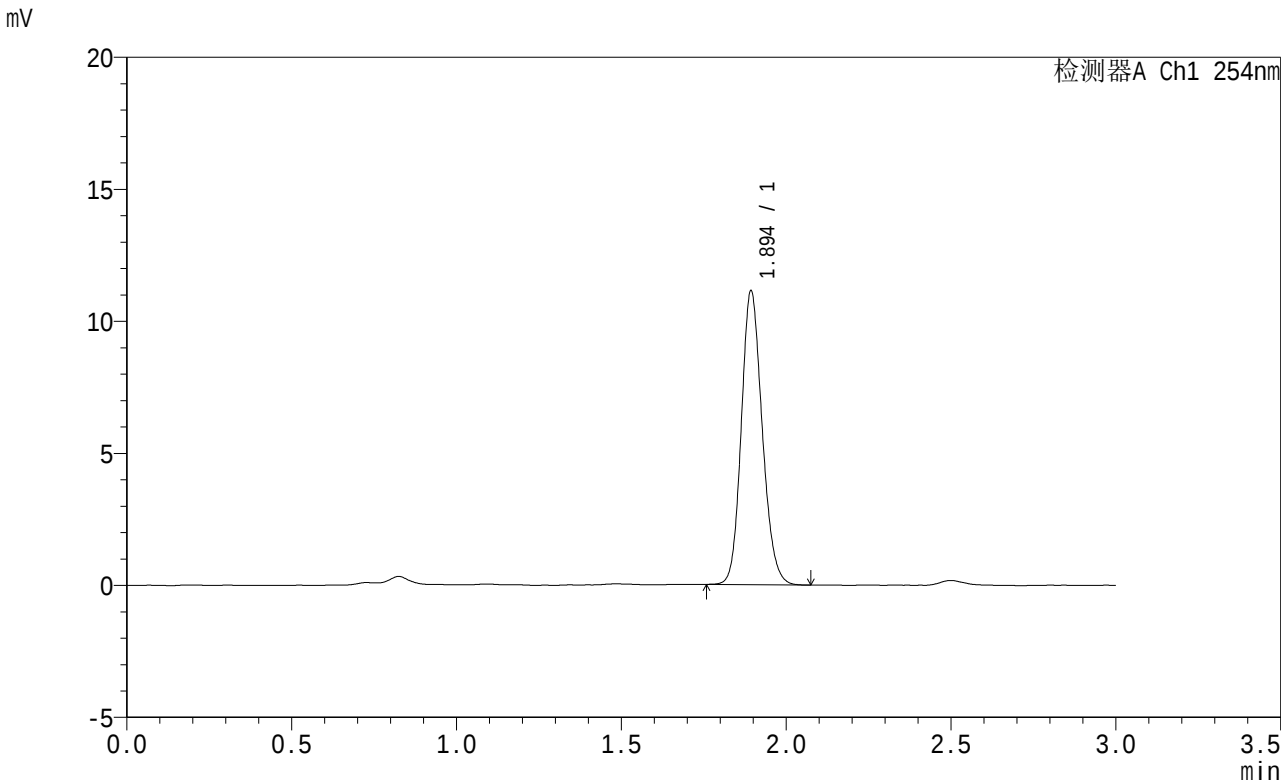

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	49088	100.000	11065	4290	1.155	--
总计		49088	100.000	11065			

图62 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1051-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p1-5min.lcr

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 14:28:41

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:28:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

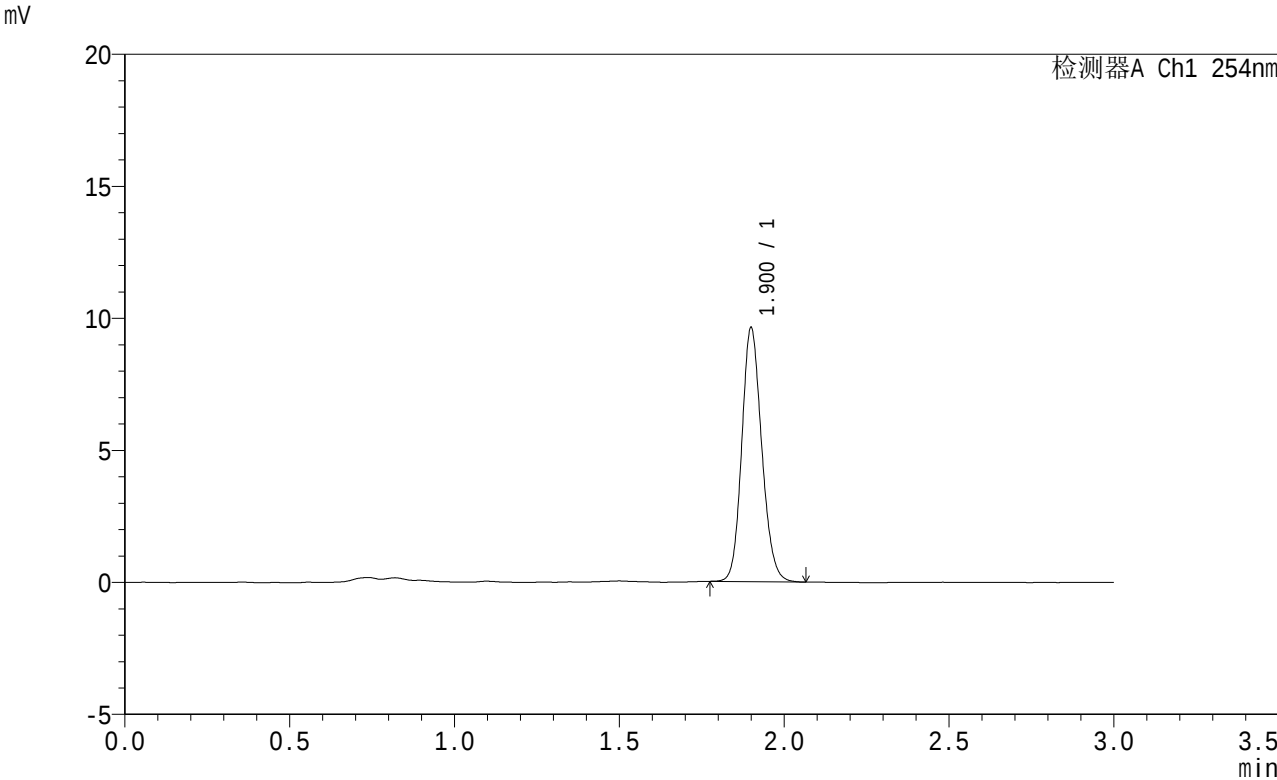

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	40532	100.000	9555	4741	1.150	--
总计		40532	100.000	9555			

图63 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1052-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p2-5min.lcr

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 14:32:07

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:28:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

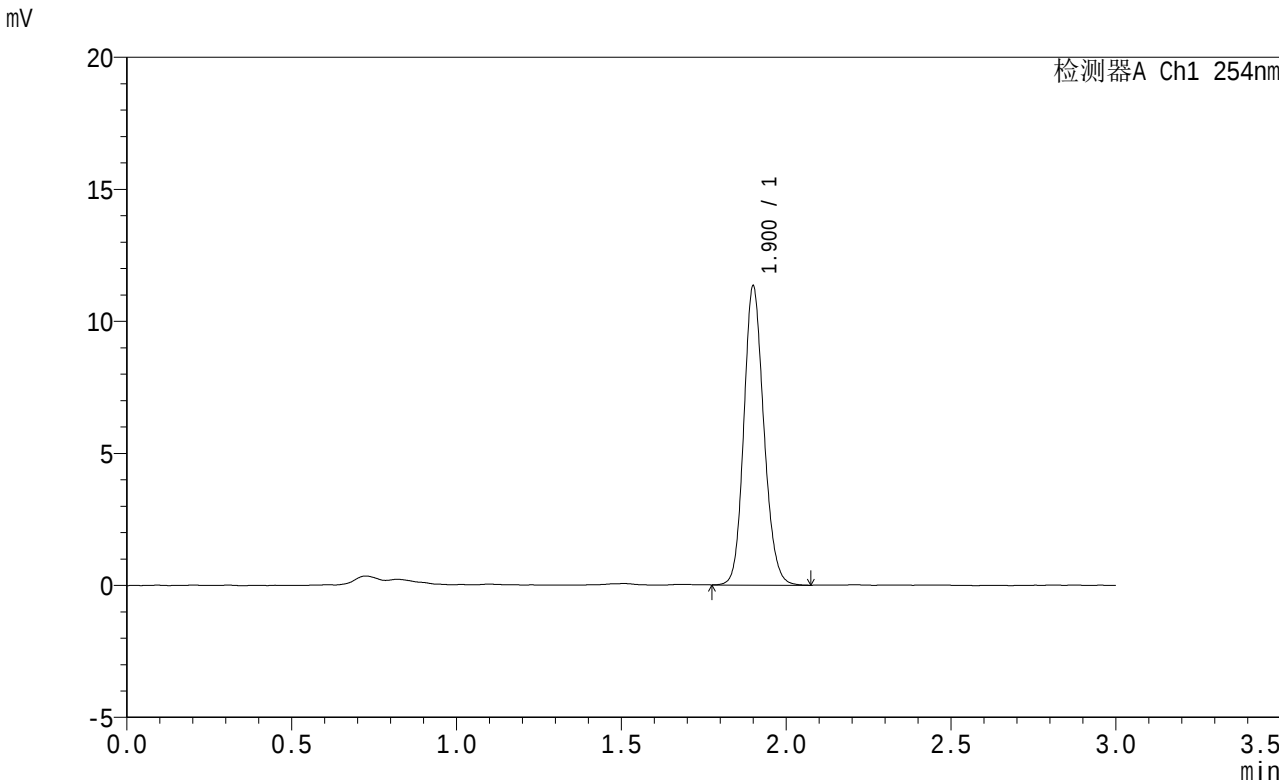

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	47808	100.000	11235	4744	1.150	--
总计		47808	100.000	11235			

图64 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1053-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p3-5min.lcr

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 14:35:33

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:28:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

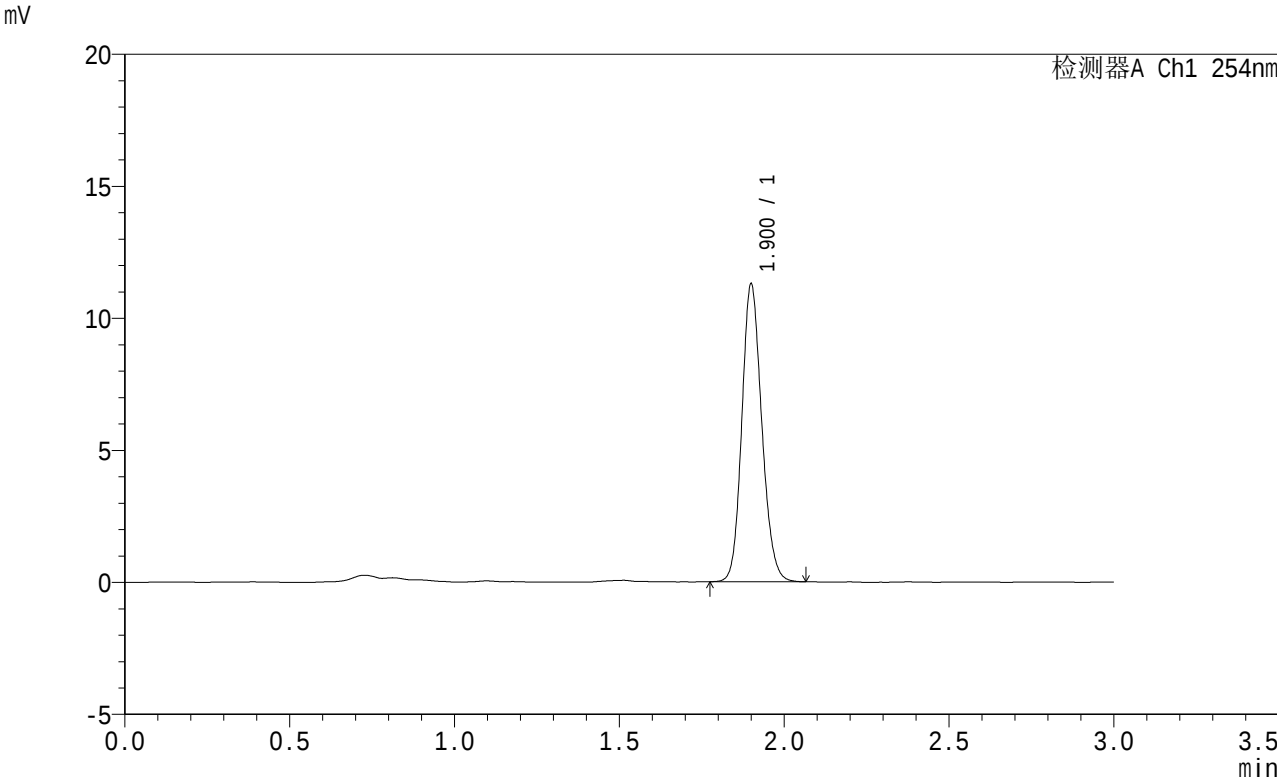

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	47489	100.000	11192	4752	1.150	--
总计		47489	100.000	11192			

图65 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1054-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p4-5min.lcr

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 14:38:59

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:28:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

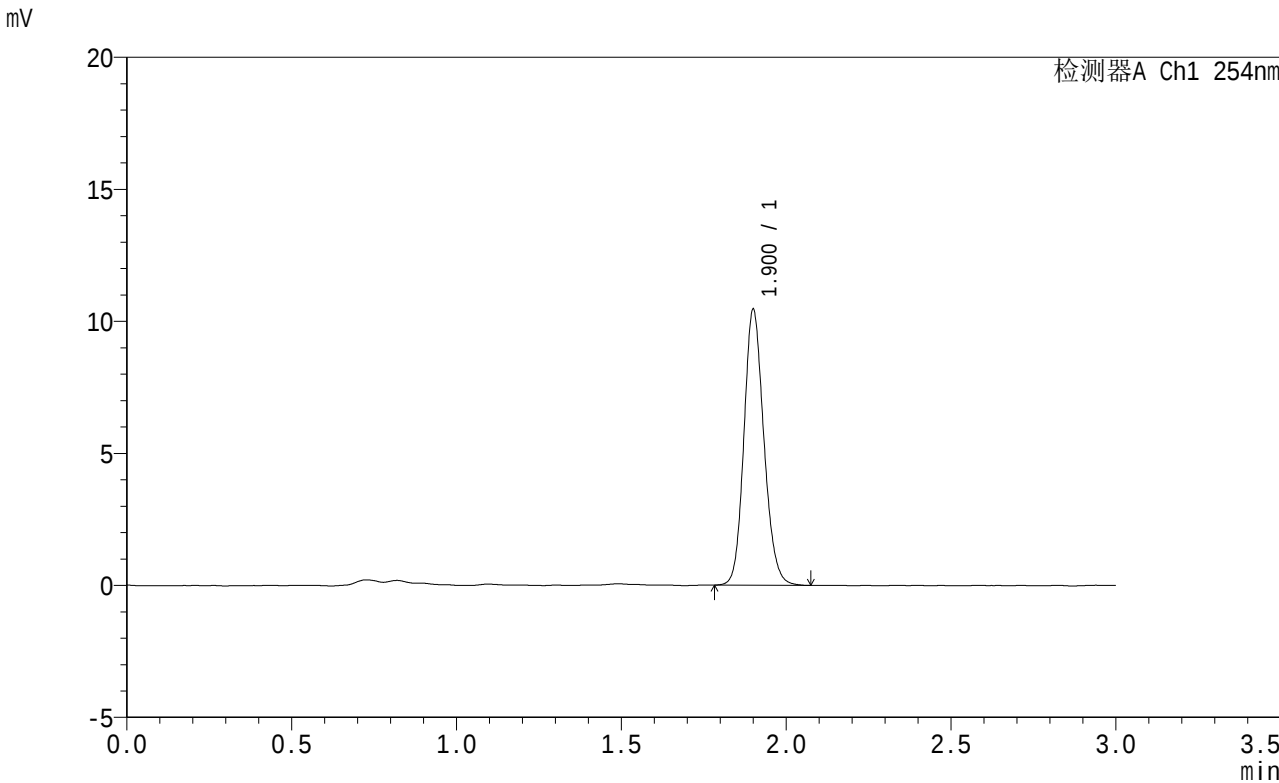

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	43970	100.000	10349	4765	1.154	--
总计		43970	100.000	10349			

图66 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1055-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p5-5min.lcr

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 14:42:25

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:28:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

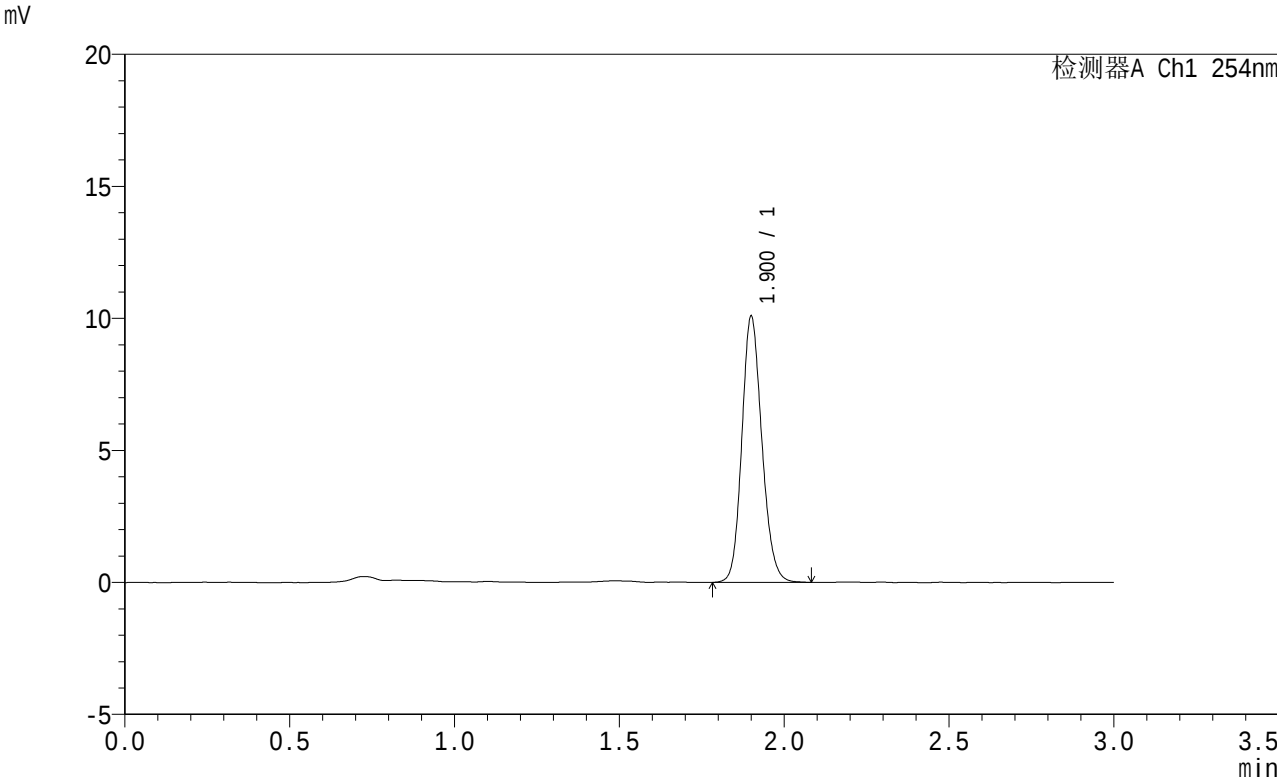

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	42579	100.000	9989	4723	1.152	--
总计		42579	100.000	9989			

图67 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1056-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p6-5min.lcr

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 14:45:52

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:28:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

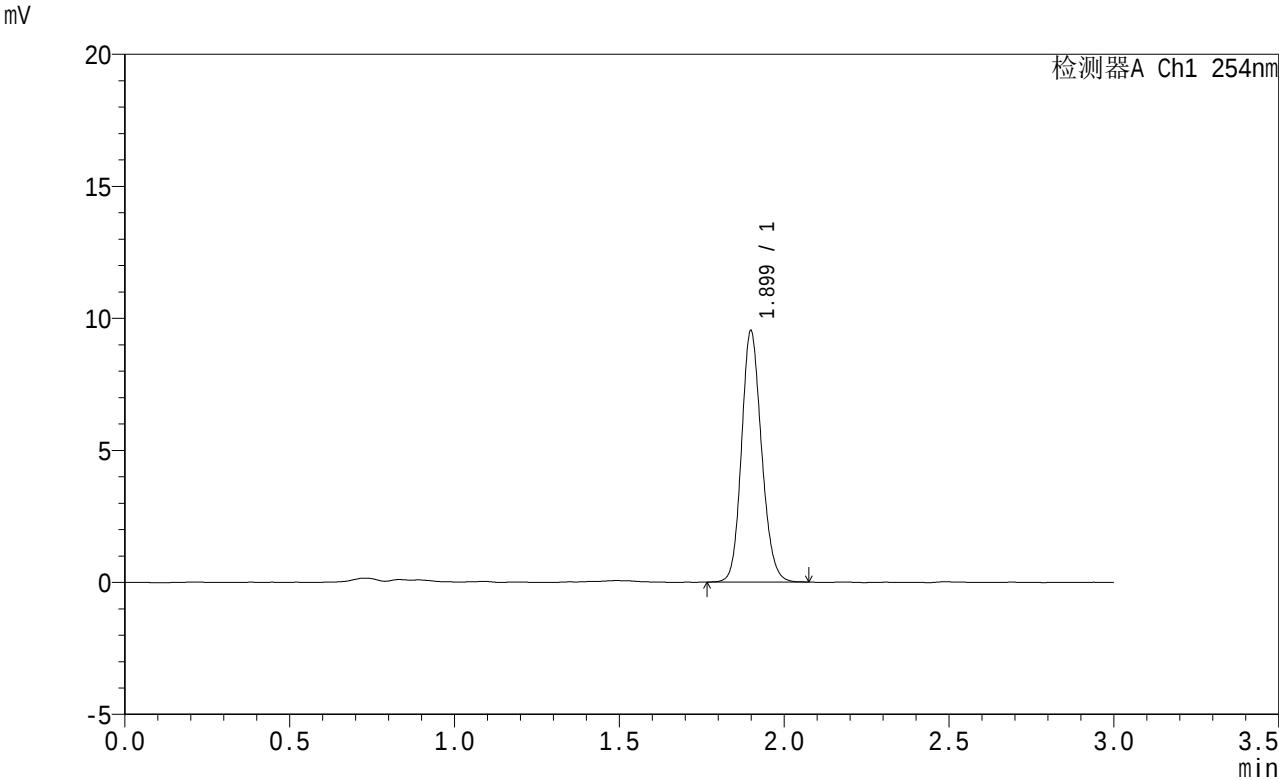

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	40201	100.000	9477	4715	1.149	--
总计		40201	100.000	9477			

图68 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1057-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p1-10min.l

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 14:49:19

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:28:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

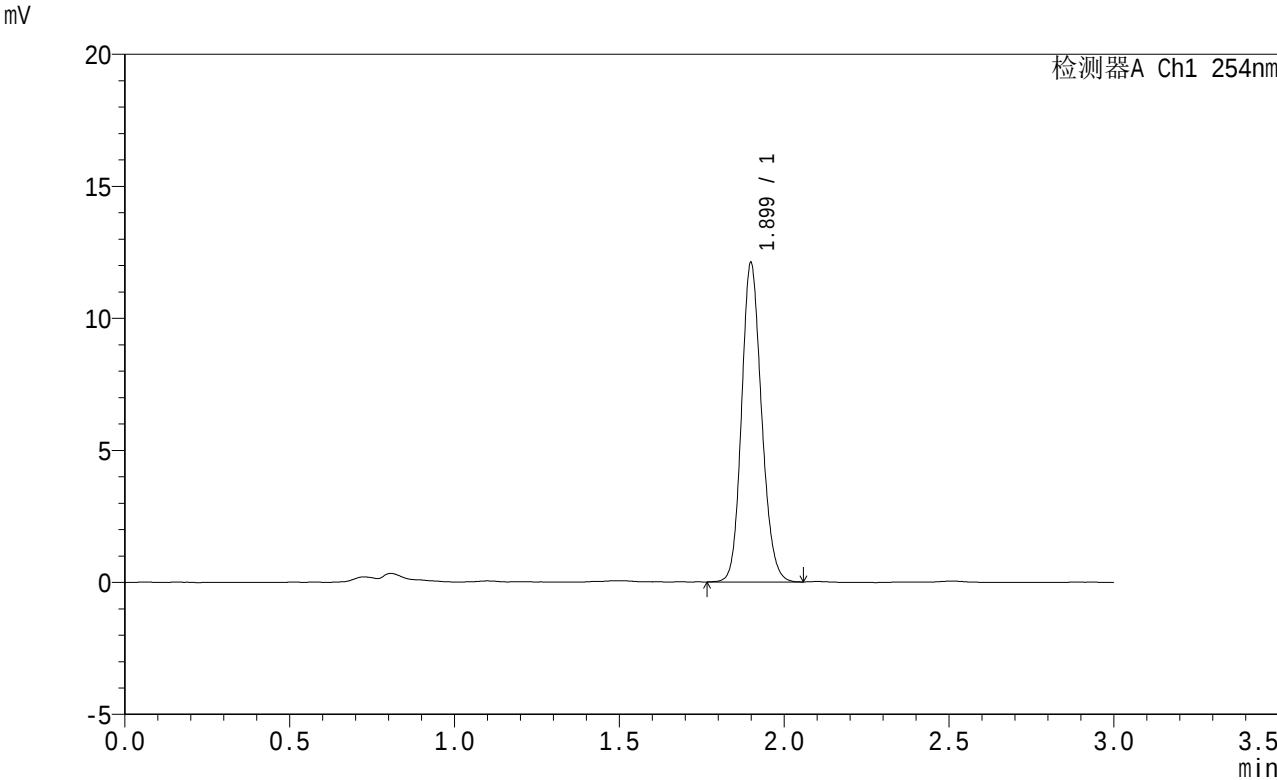

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	50985	100.000	12032	4724	1.148	--
总计		50985	100.000	12032			

图69 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1058-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p2-10min.l

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 14:52:46

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:28:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

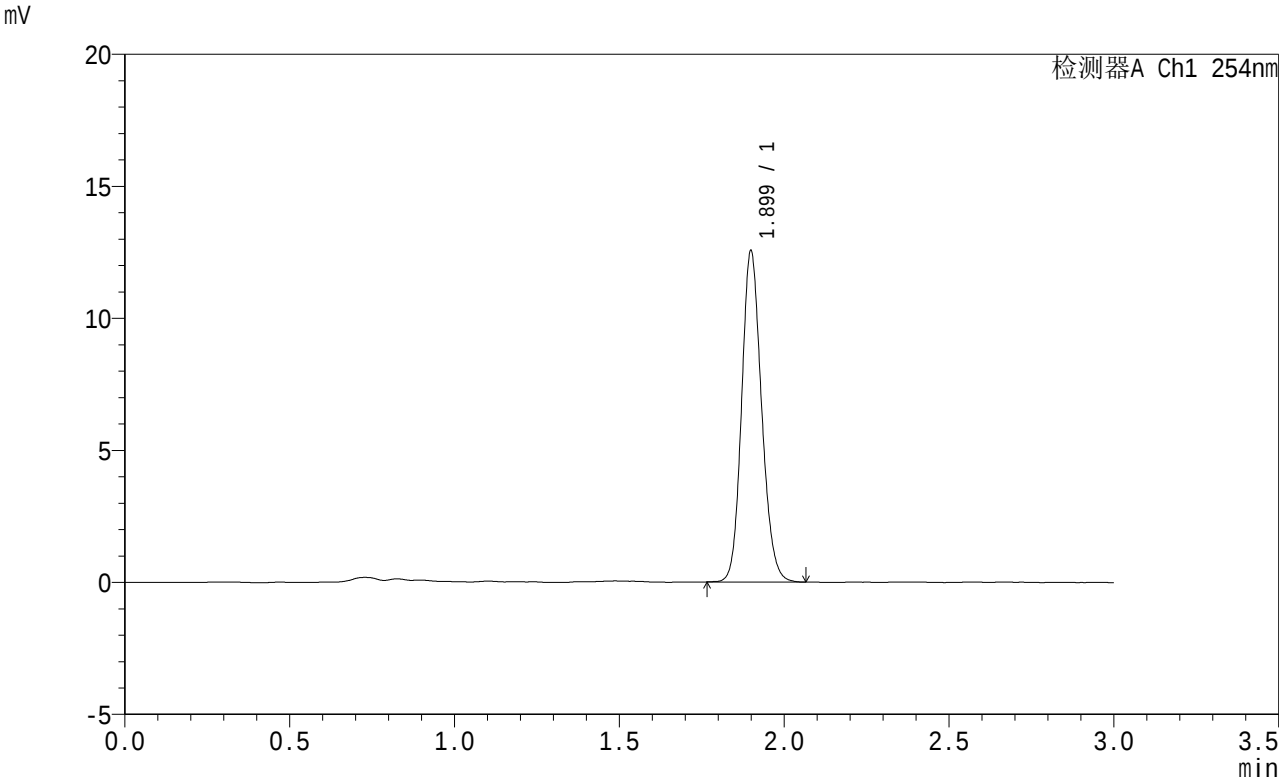

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	52800	100.000	12480	4749	1.149	--
总计		52800	100.000	12480			

图70 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1059-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p3-10min.l
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-20
: 50 μl
: 2025/01/13 14:56:13
: 2025/01/14 08:28:30
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

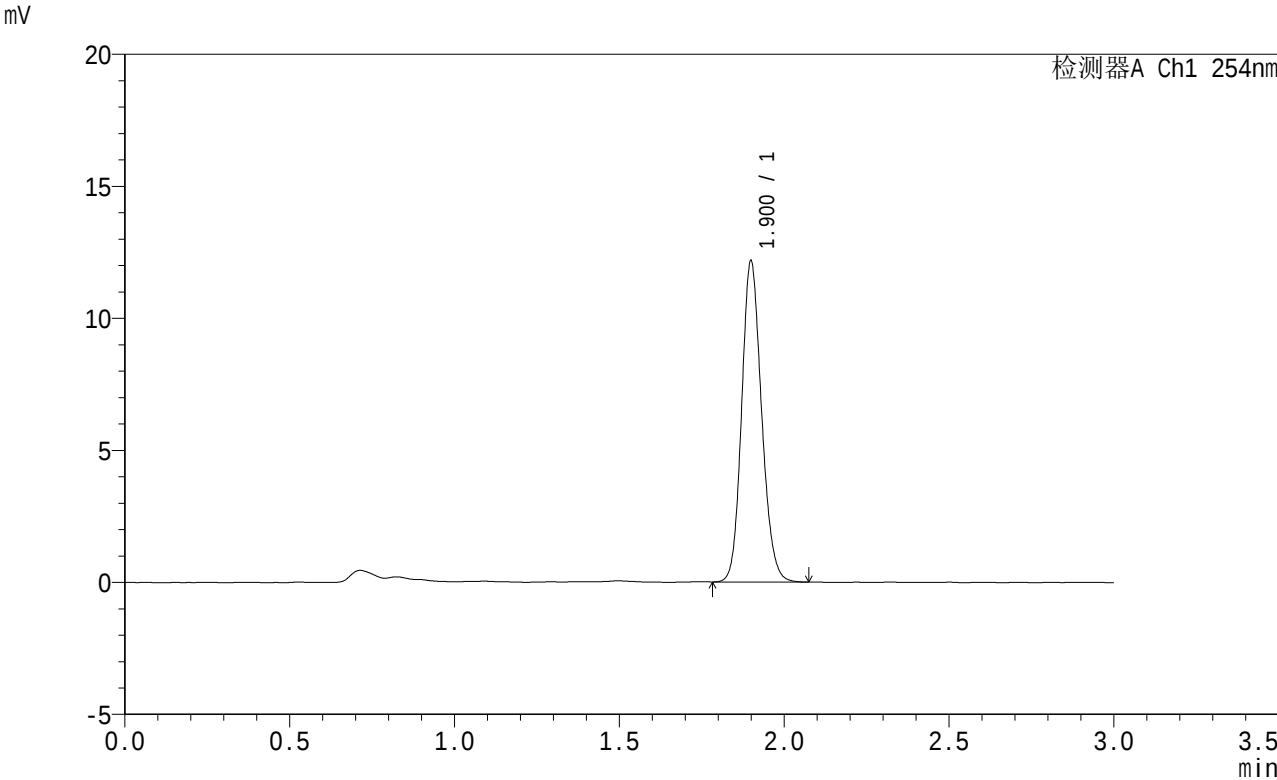

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	51153	100.000	12096	4757	1.150	--
总计		51153	100.000	12096			

图71 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1060-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p4-10min.l

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 14:59:40

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:28:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

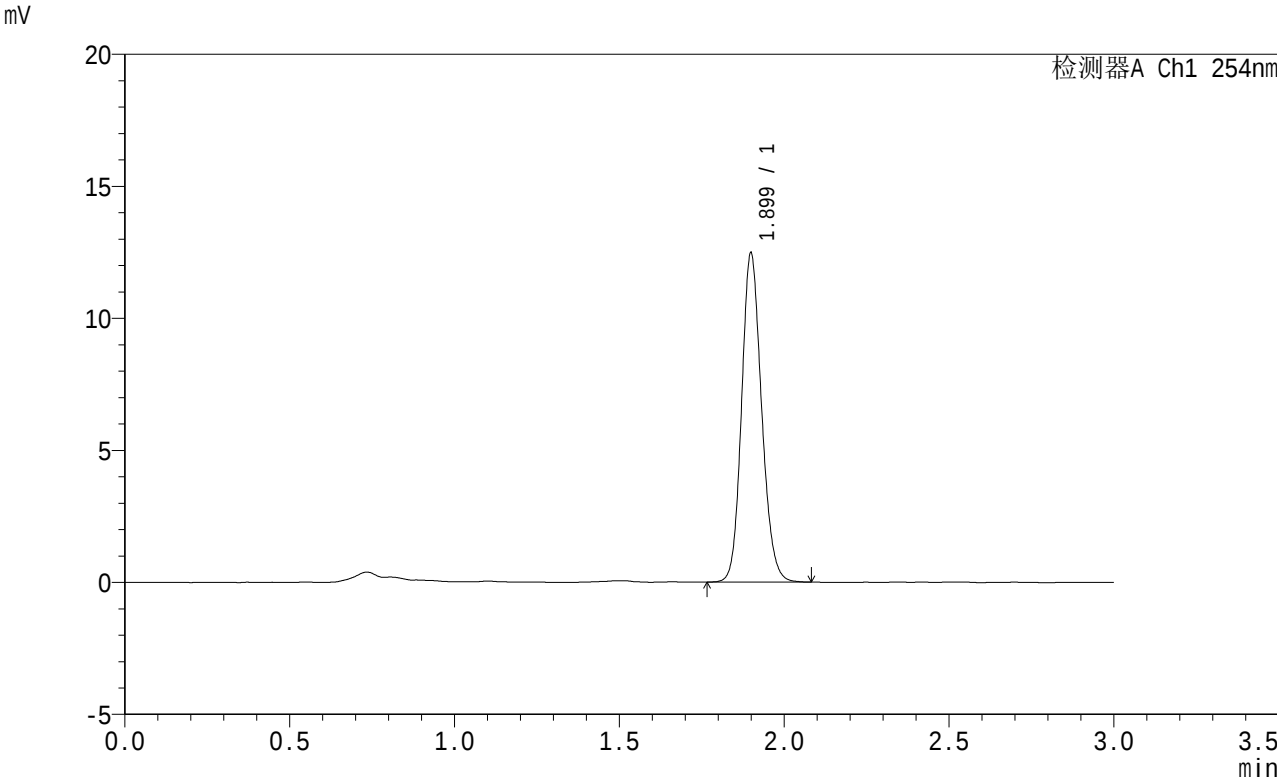

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	52575	100.000	12398	4736	1.149	--
总计		52575	100.000	12398			

图72 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1061-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p5-10min.l
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-38
: 50 μl
: 2025/01/13 15:03:06
: 2025/01/14 08:28:35
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

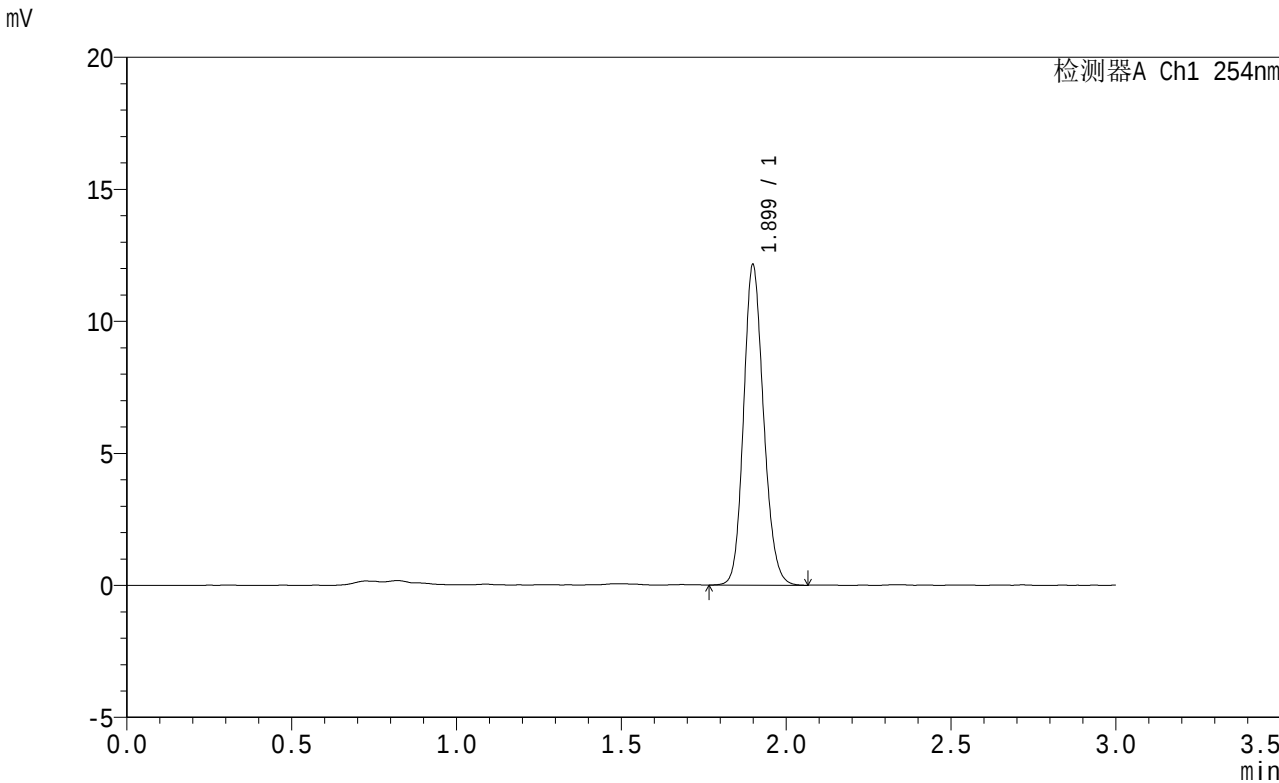

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	51159	100.000	12076	4736	1.152	--
总计		51159	100.000	12076			

图73 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1062-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p6-10min.l

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 15:06:32

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:28:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

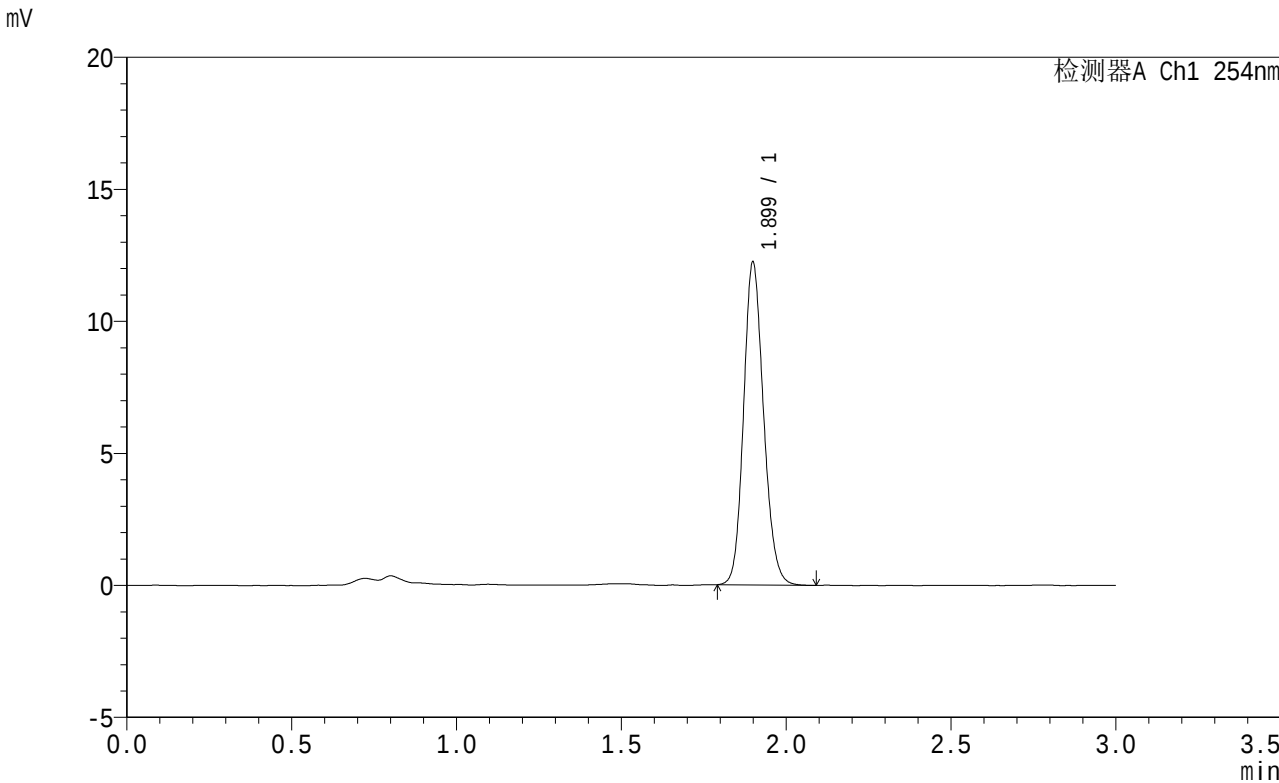

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	51643	100.000	12171	4719	1.152	--
总计		51643	100.000	12171			

图74 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1063-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p1-15min.l

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 15:09:58

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:28:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

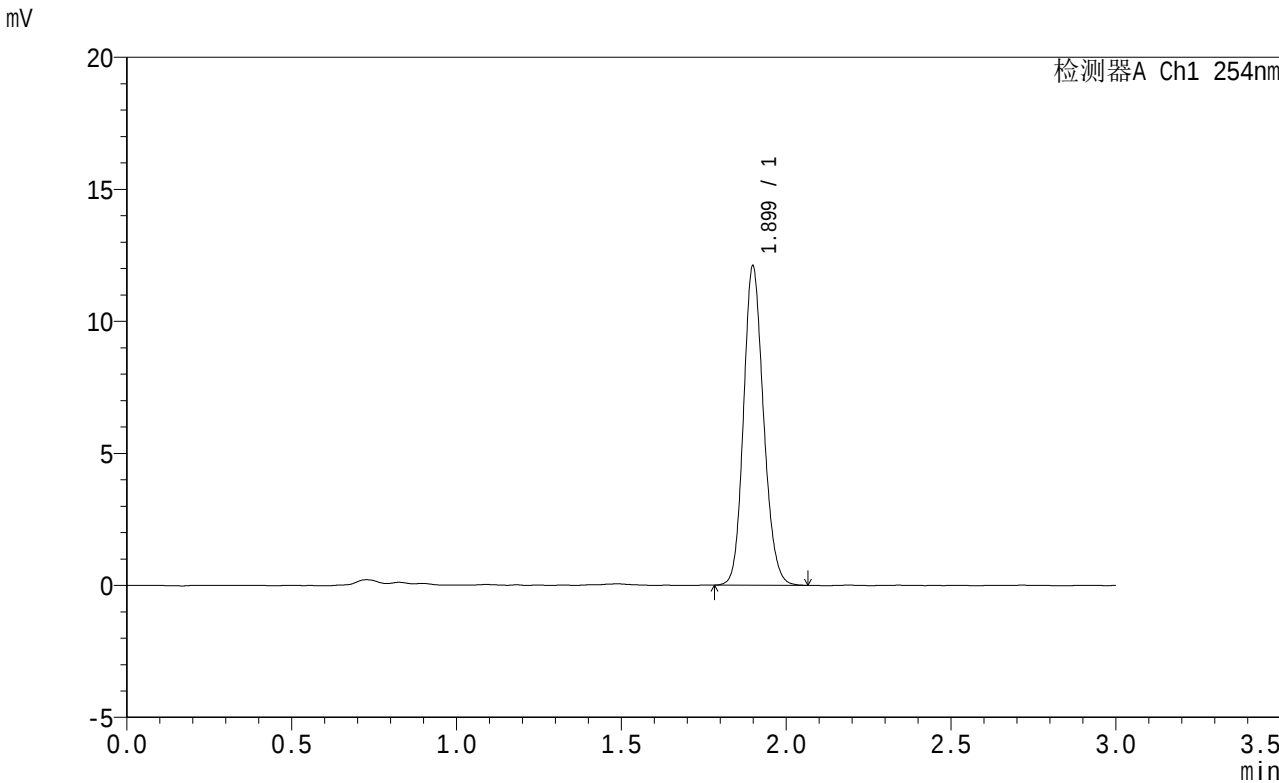

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	51008	100.000	12038	4724	1.151	--
总计		51008	100.000	12038			

图75 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1064-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p2-15min.l

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 15:13:25

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:28:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

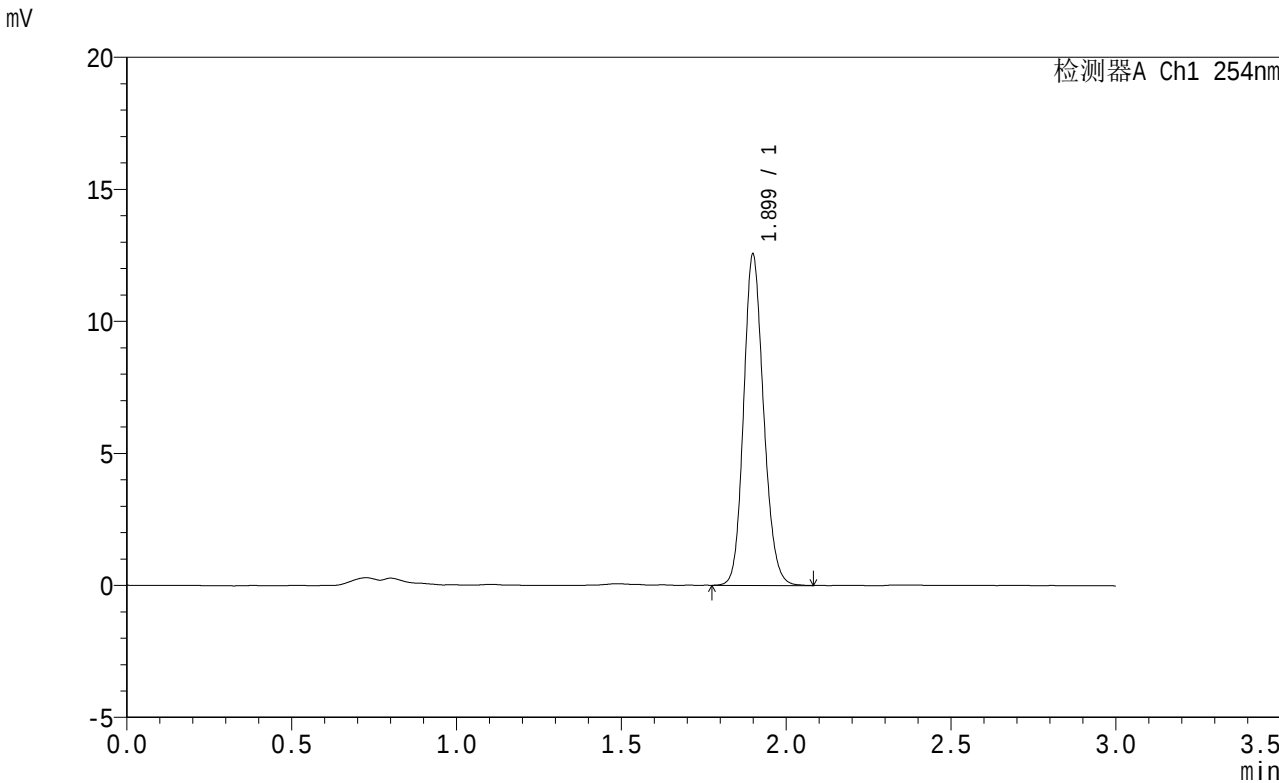

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	52856	100.000	12475	4746	1.151	--
总计		52856	100.000	12475			

图76 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1065-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p3-15min.l

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 15:16:53

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:28:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

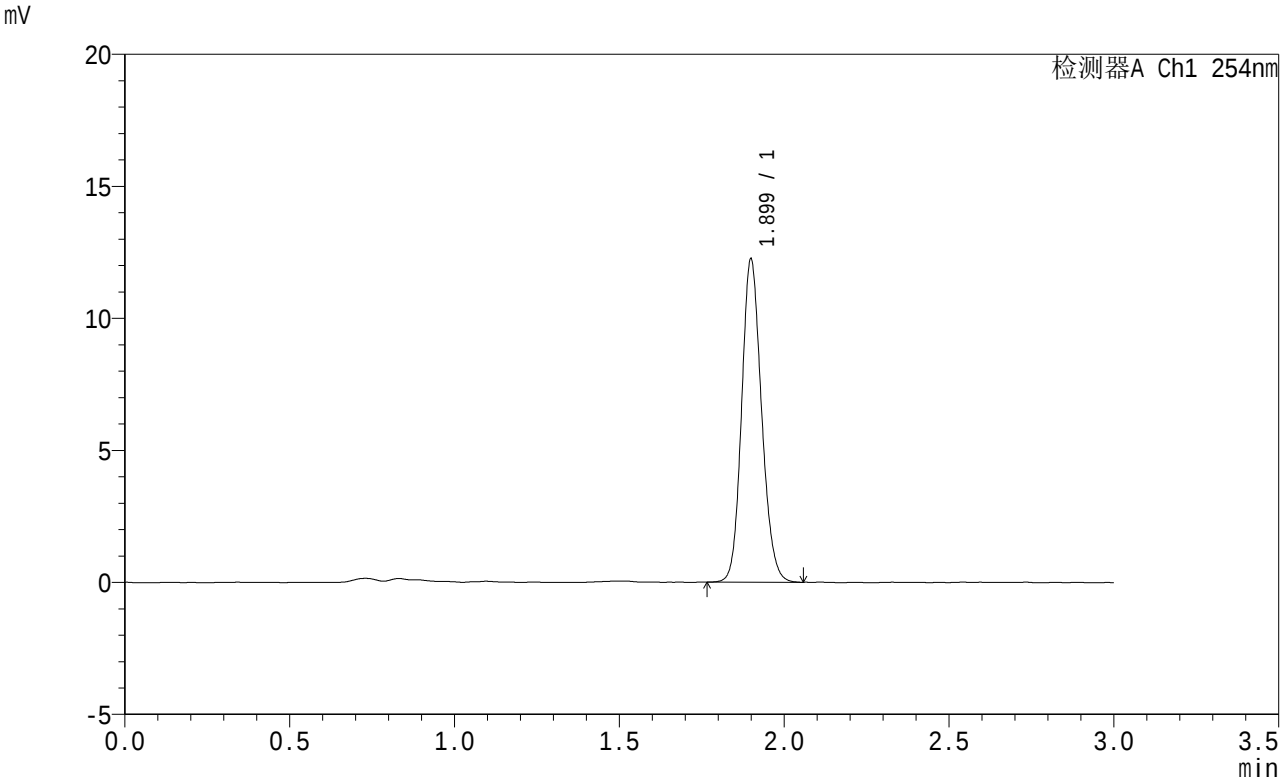

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	51459	100.000	12174	4742	1.147	--
总计		51459	100.000	12174			

图77 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1066-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p4-15min.l
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-30
: 50 μl
: 2025/01/13 15:20:19
: 2025/01/14 08:28:50
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

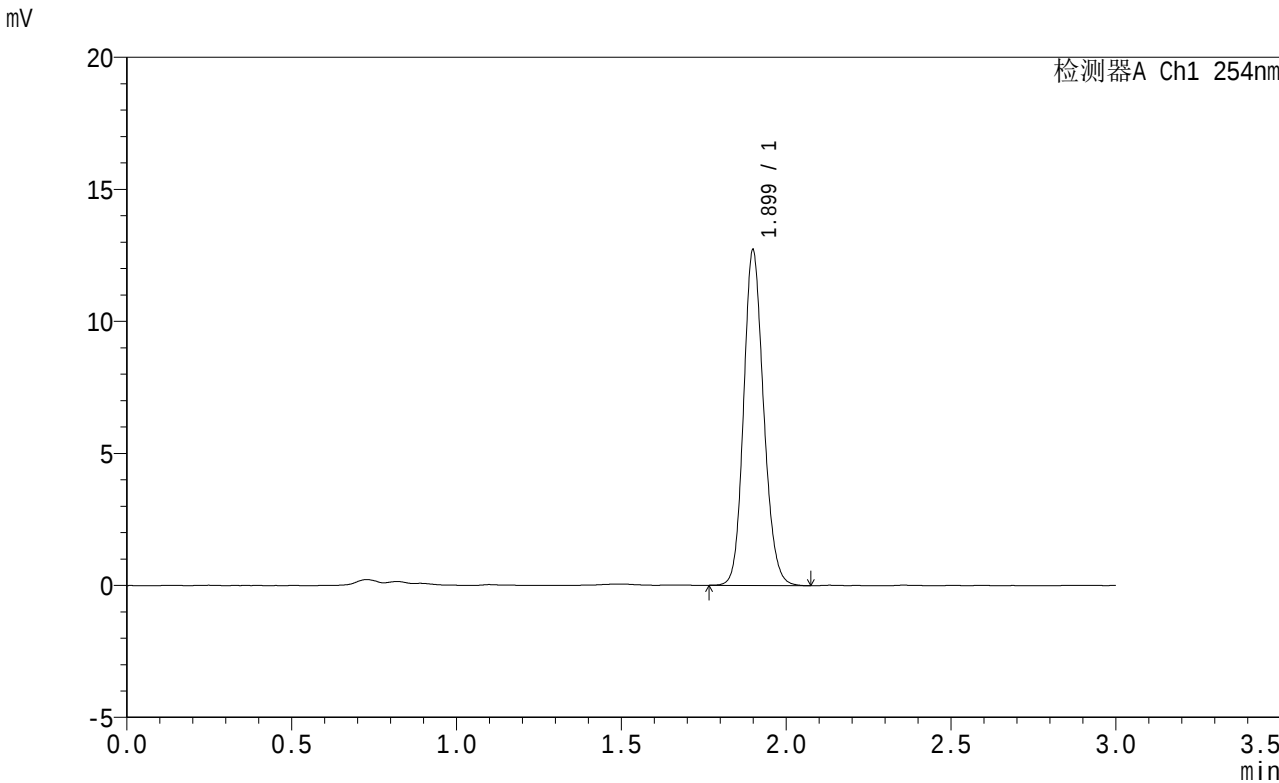

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	53635	100.000	12639	4738	1.150	--
总计		53635	100.000	12639			

图78 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1067-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p5-15min.l
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-39
: 50 μl
: 2025/01/13 15:23:45
: 2025/01/14 08:28:54
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

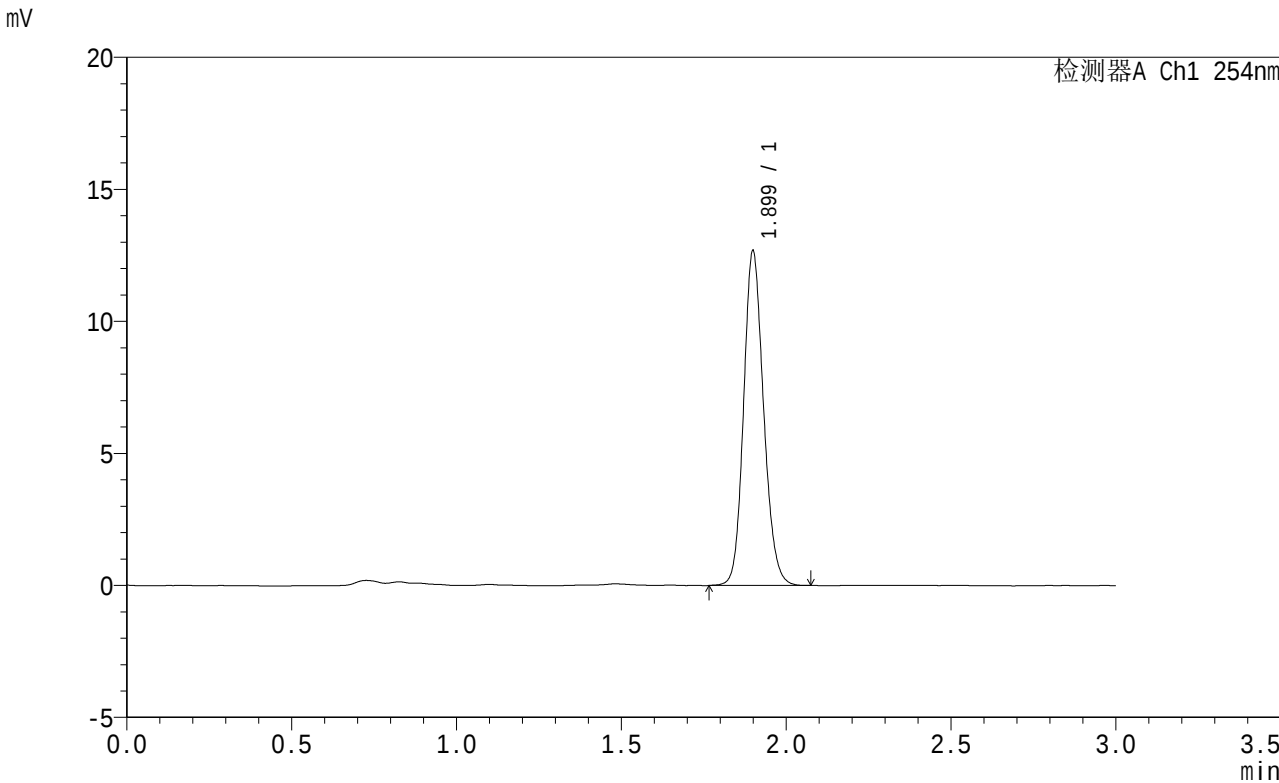

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	53421	100.000	12603	4746	1.148	--
总计		53421	100.000	12603			

图79 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1068-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p6-15min.l

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 15:27:11

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:28:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

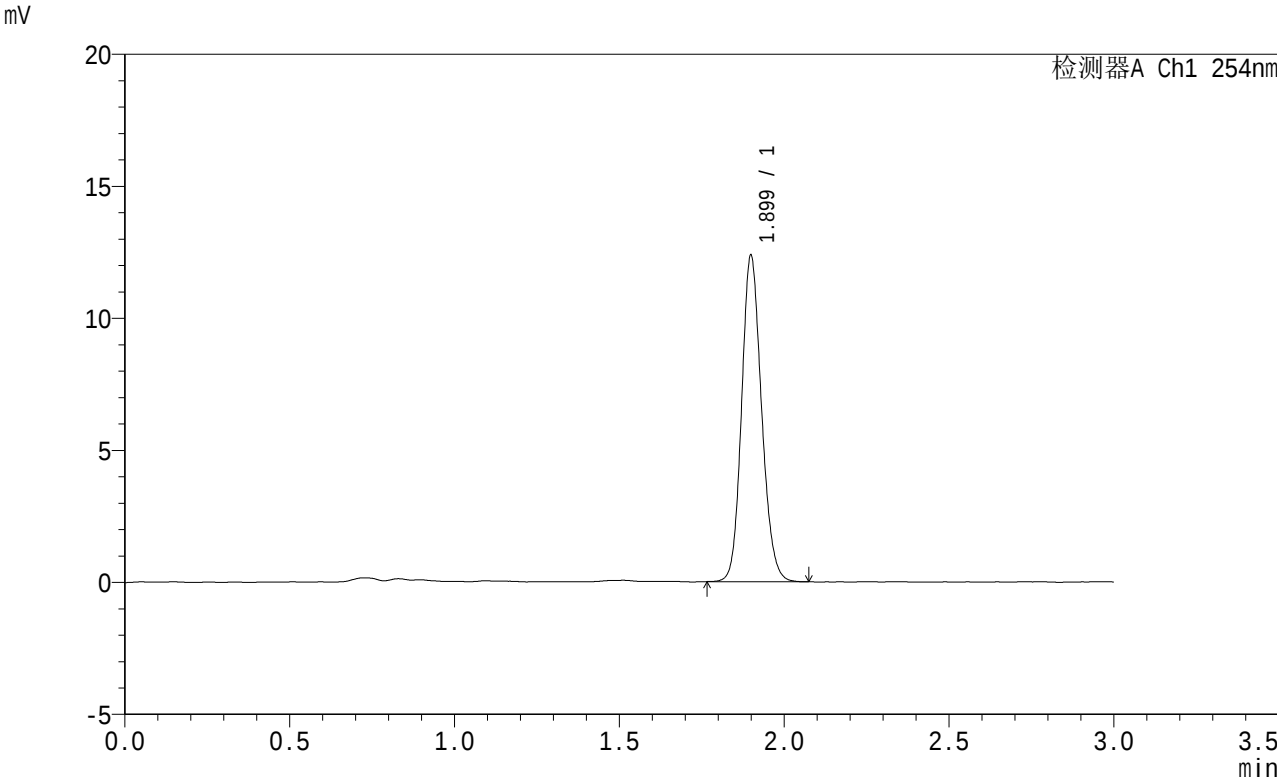

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	52049	100.000	12295	4743	1.148	--
总计		52049	100.000	12295			

图80 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1069-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p1-20min.l
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-4
: 50 μl
: 2025/01/13 15:30:38
: 2025/01/14 08:28:59
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

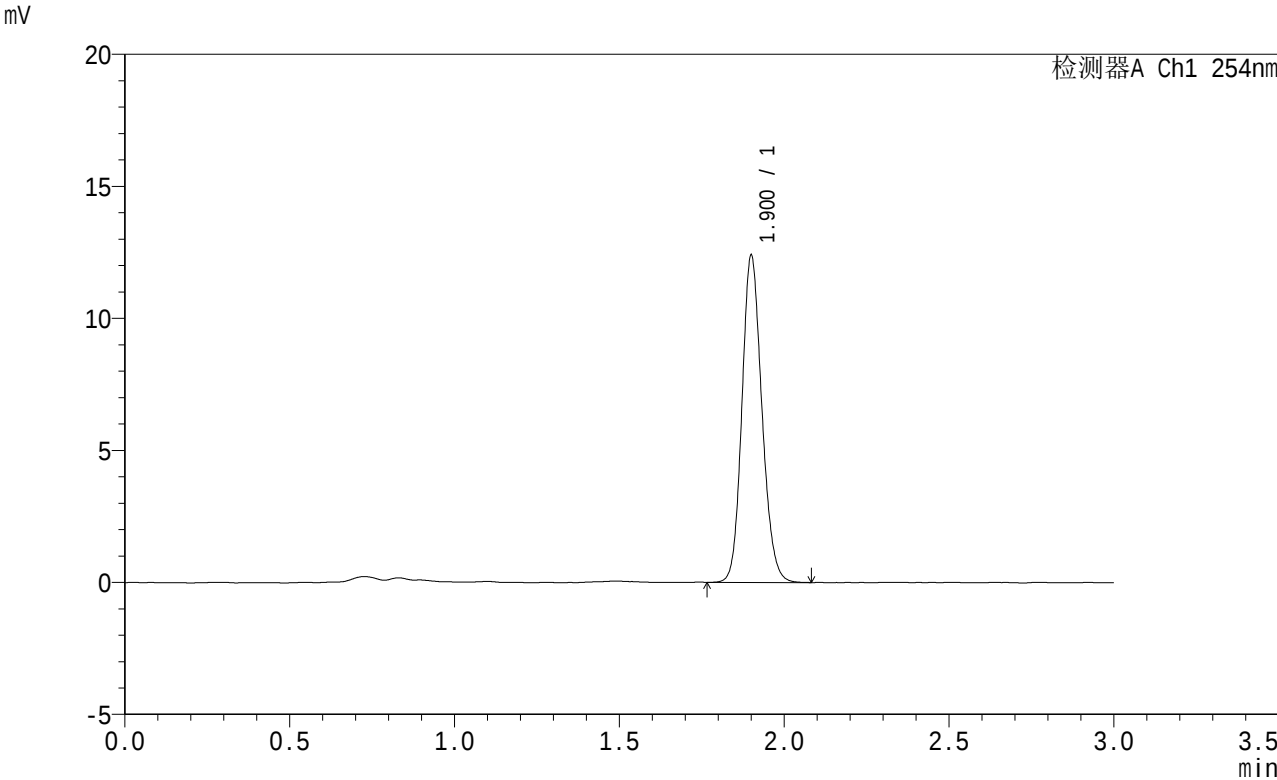

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	52174	100.000	12268	4744	1.152	--
总计		52174	100.000	12268			

图81 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1070-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p2-20min.l
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-13
: 50 μl
: 2025/01/13 15:34:05
: 2025/01/14 08:29:02
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

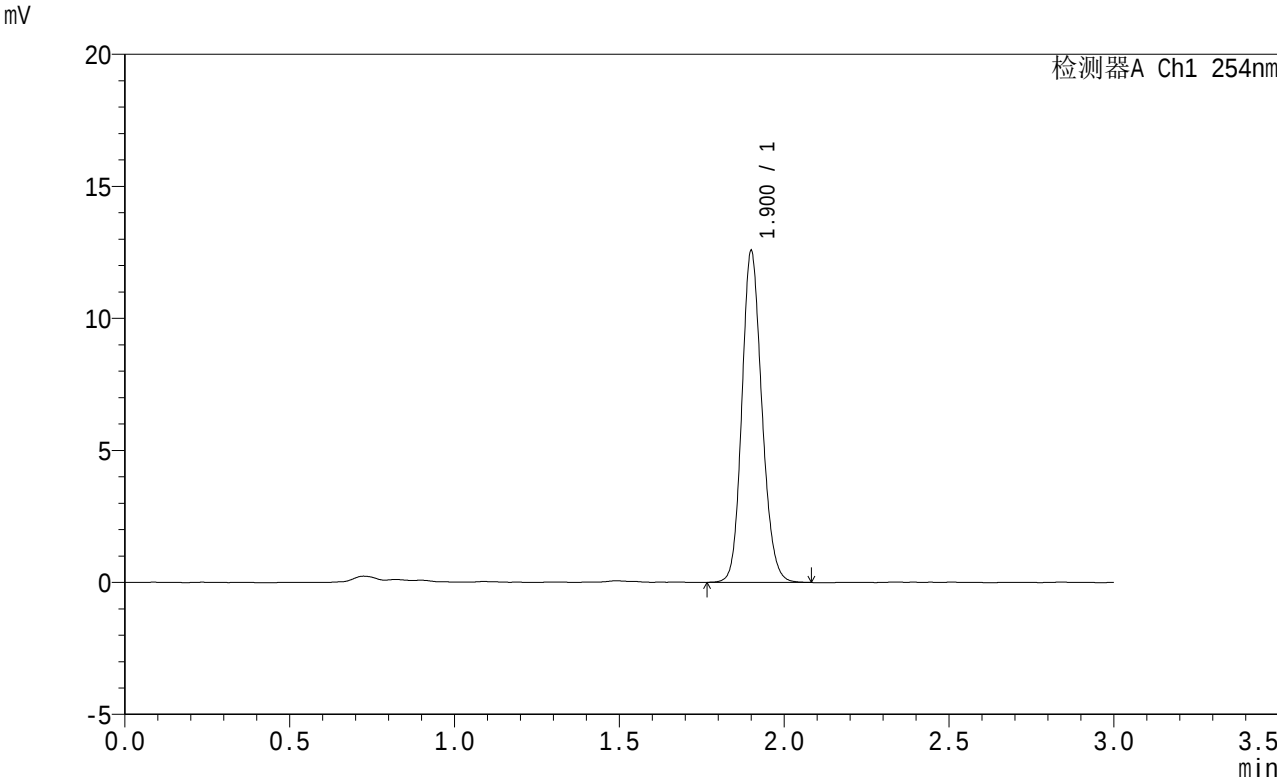

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	53019	100.000	12444	4740	1.152	--
总计		53019	100.000	12444			

图82 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1071-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p3-20min.l
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-22
: 50 μl
: 2025/01/13 15:37:32
: 2025/01/14 08:29:05
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

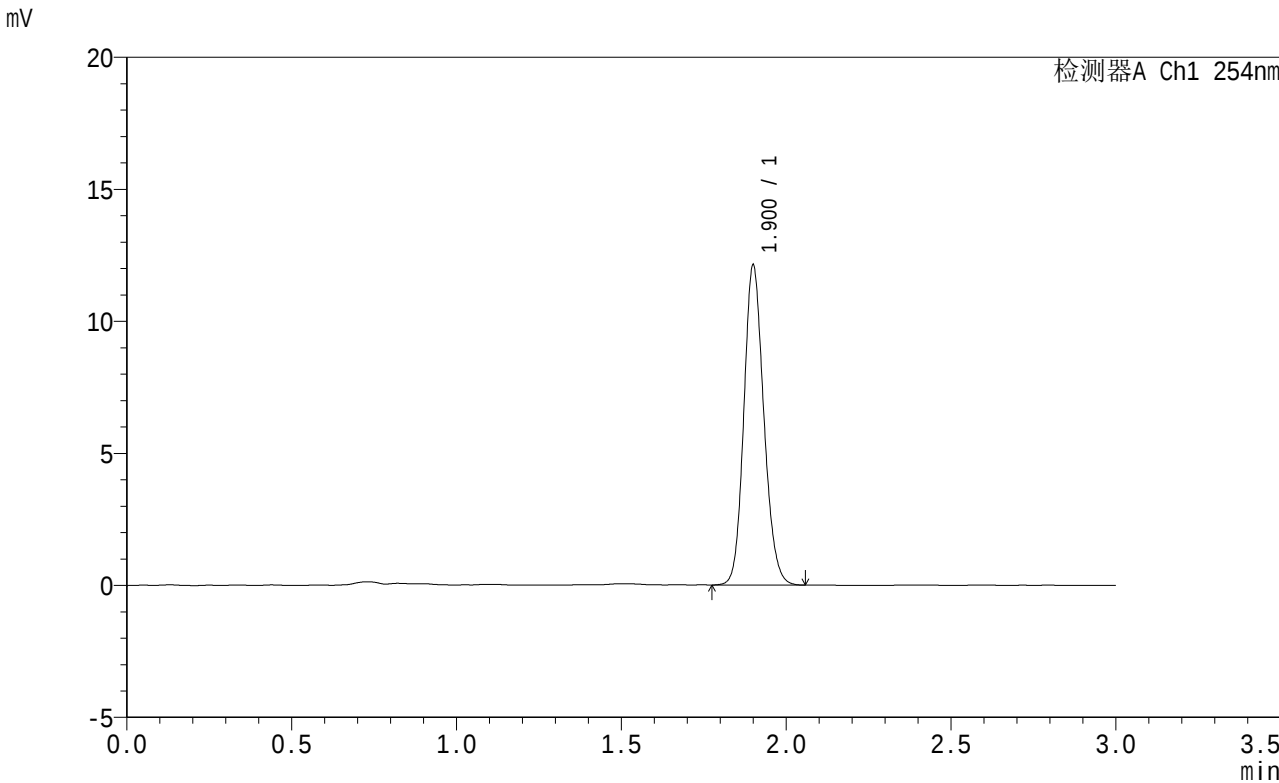

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	51062	100.000	12019	4740	1.148	--
总计		51062	100.000	12019			

图83 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1072-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p4-20min.l

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 15:40:58

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:29:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

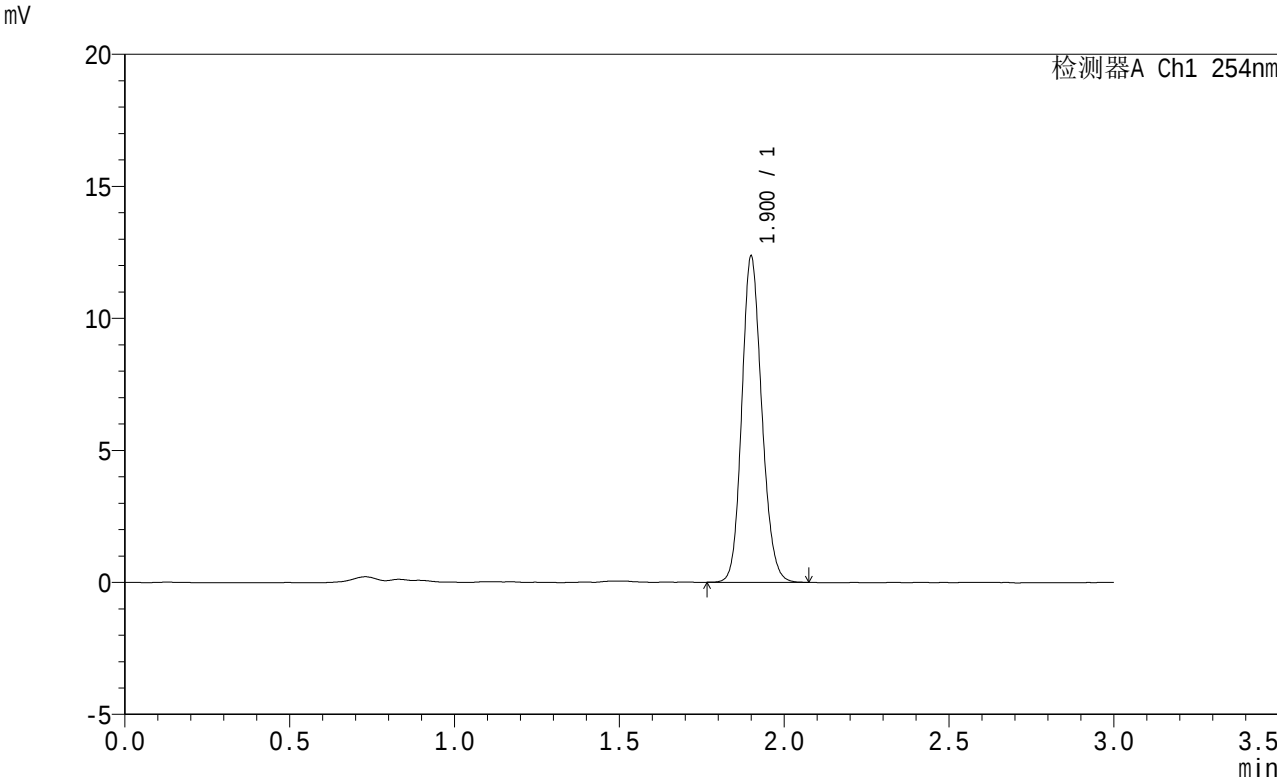

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	52056	100.000	12255	4745	1.149	--
总计		52056	100.000	12255			

图84 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1073-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p5-20min.l

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 15:44:24

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:29:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

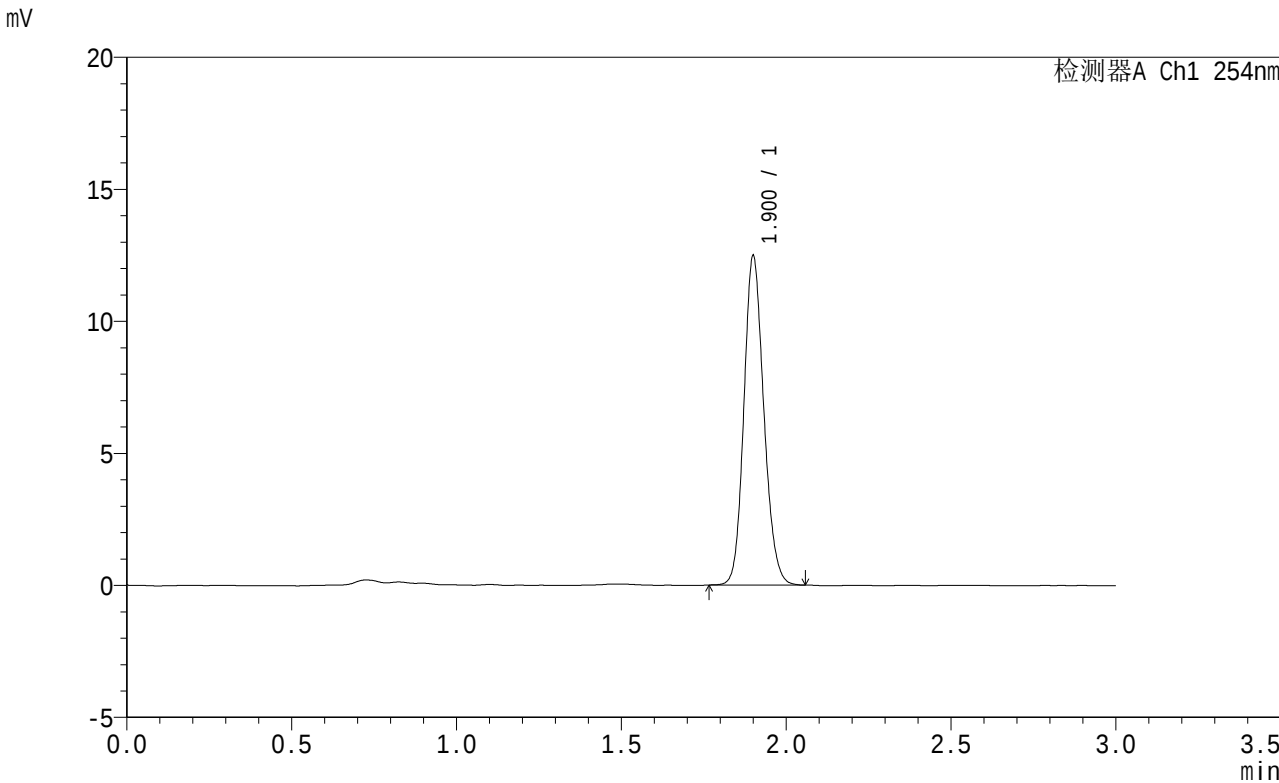

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	52479	100.000	12363	4757	1.150	--
总计		52479	100.000	12363			

图85 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1074-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p6-20min.l

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 15:47:50

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:29:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

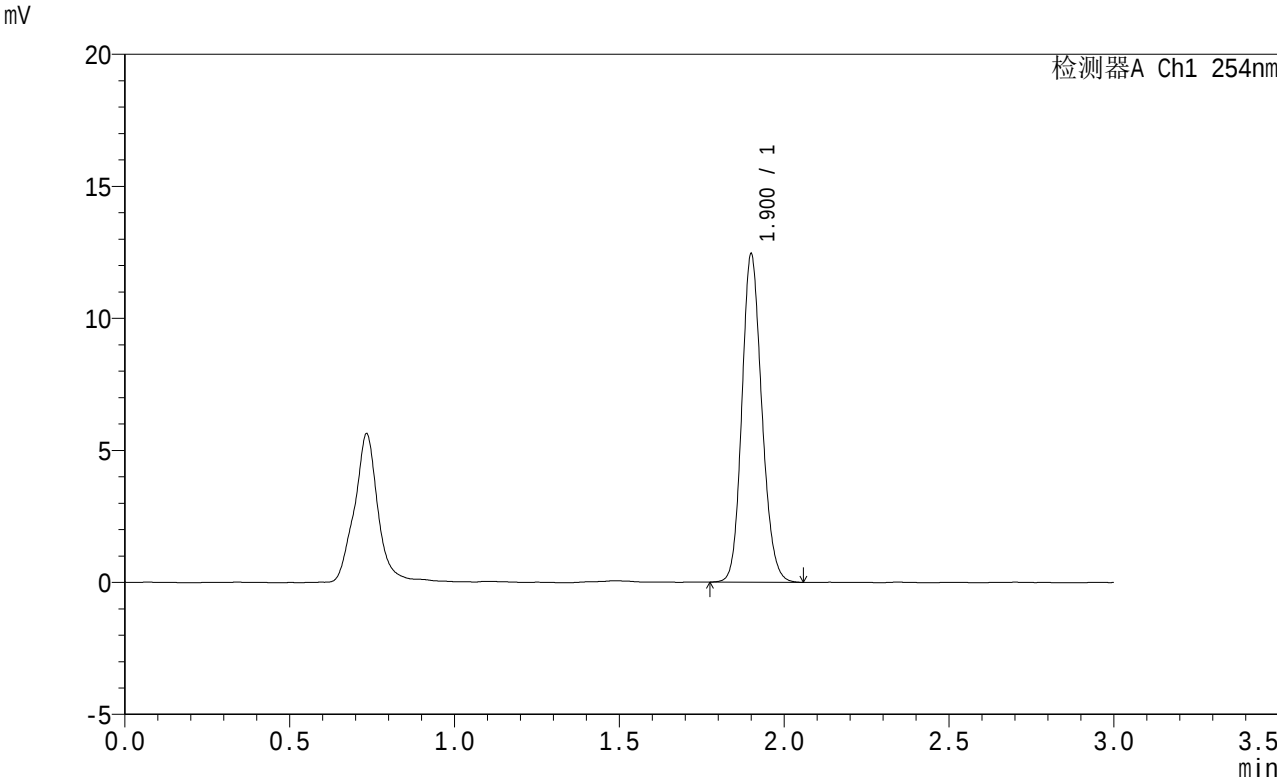

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	52283	100.000	12324	4757	1.153	--
总计		52283	100.000	12324			

图86 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1075-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p1-30min.l
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-5
: 50 μl
: 2025/01/13 15:51:16
: 2025/01/14 08:29:16
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

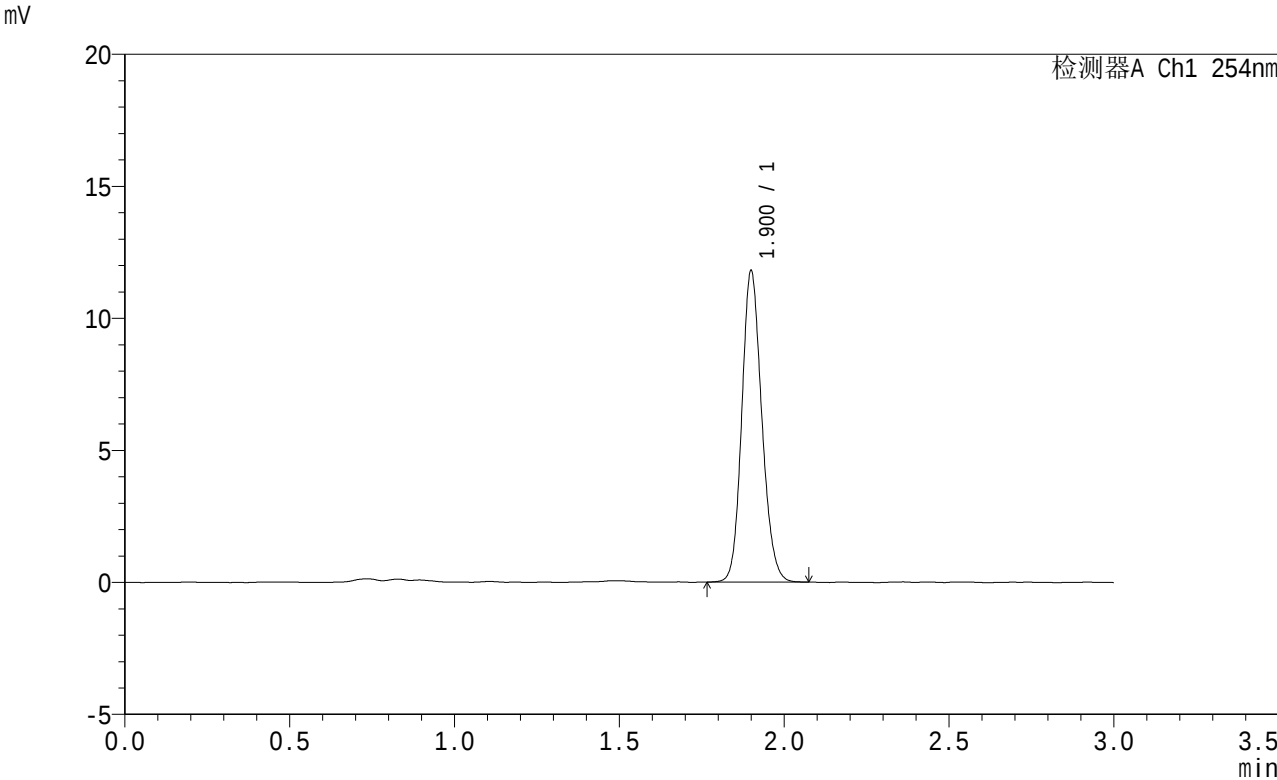

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	49789	100.000	11705	4723	1.152	--
总计		49789	100.000	11705			

图87 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1076-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p2-30min.l

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 15:54:43

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:29:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

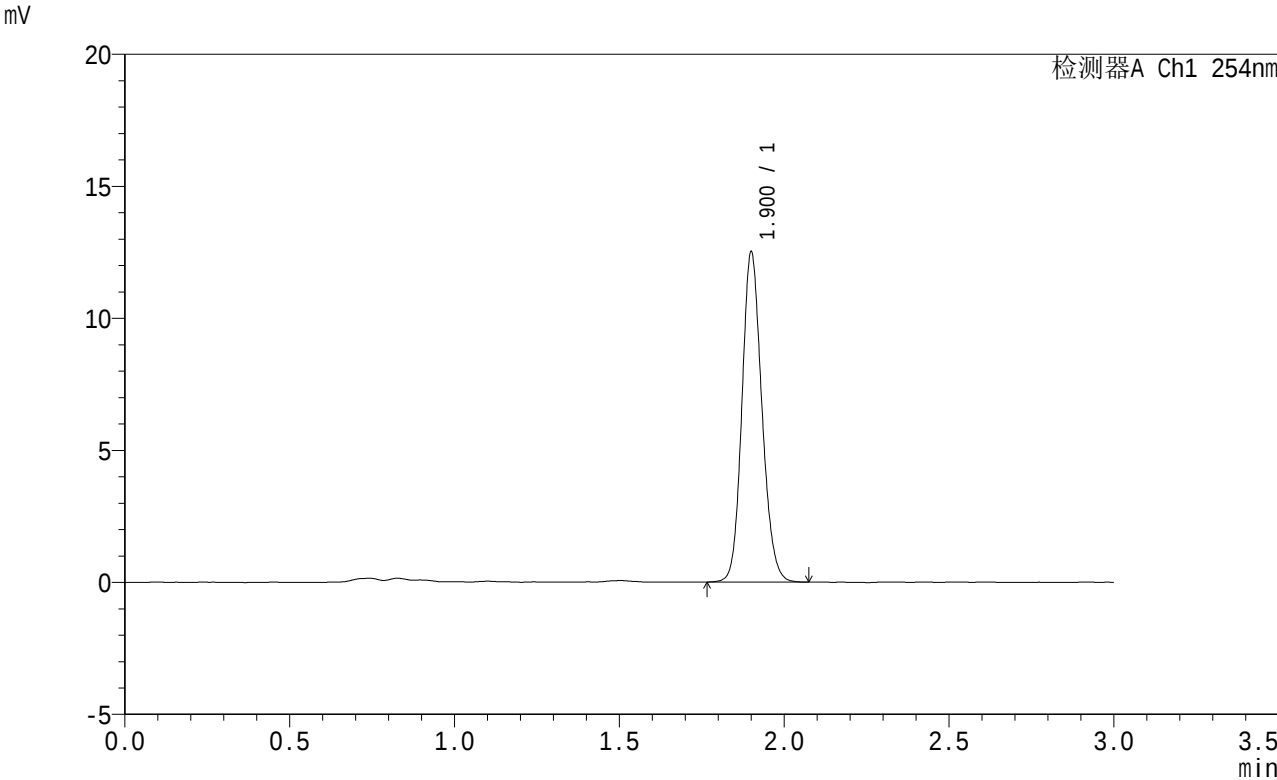

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	52610	100.000	12382	4758	1.146	--
总计		52610	100.000	12382			

图88 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1077-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p3-30min.l

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 15:58:10

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:29:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

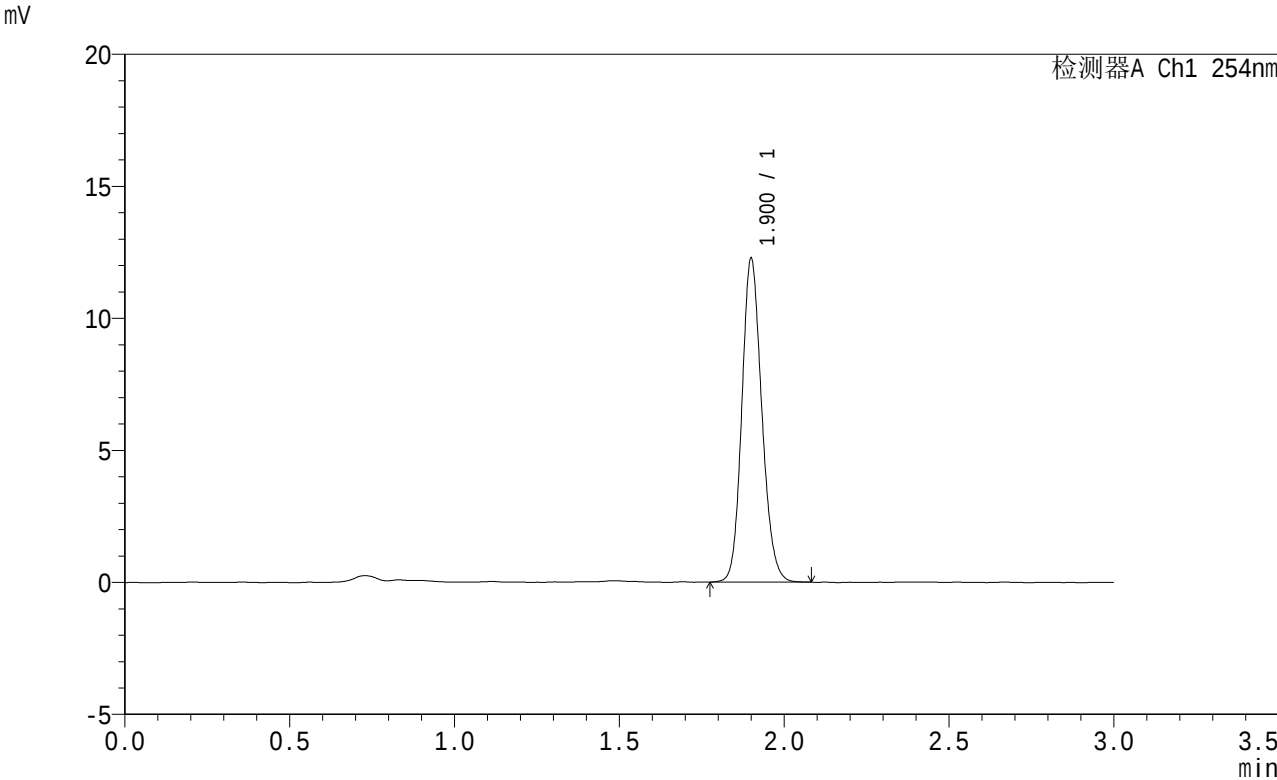

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	51653	100.000	12156	4738	1.152	--
总计		51653	100.000	12156			

图89 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1078-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p4-30min.l
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-32
: 50 μl
: 2025/01/13 16:01:36
: 2025/01/14 08:29:25
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

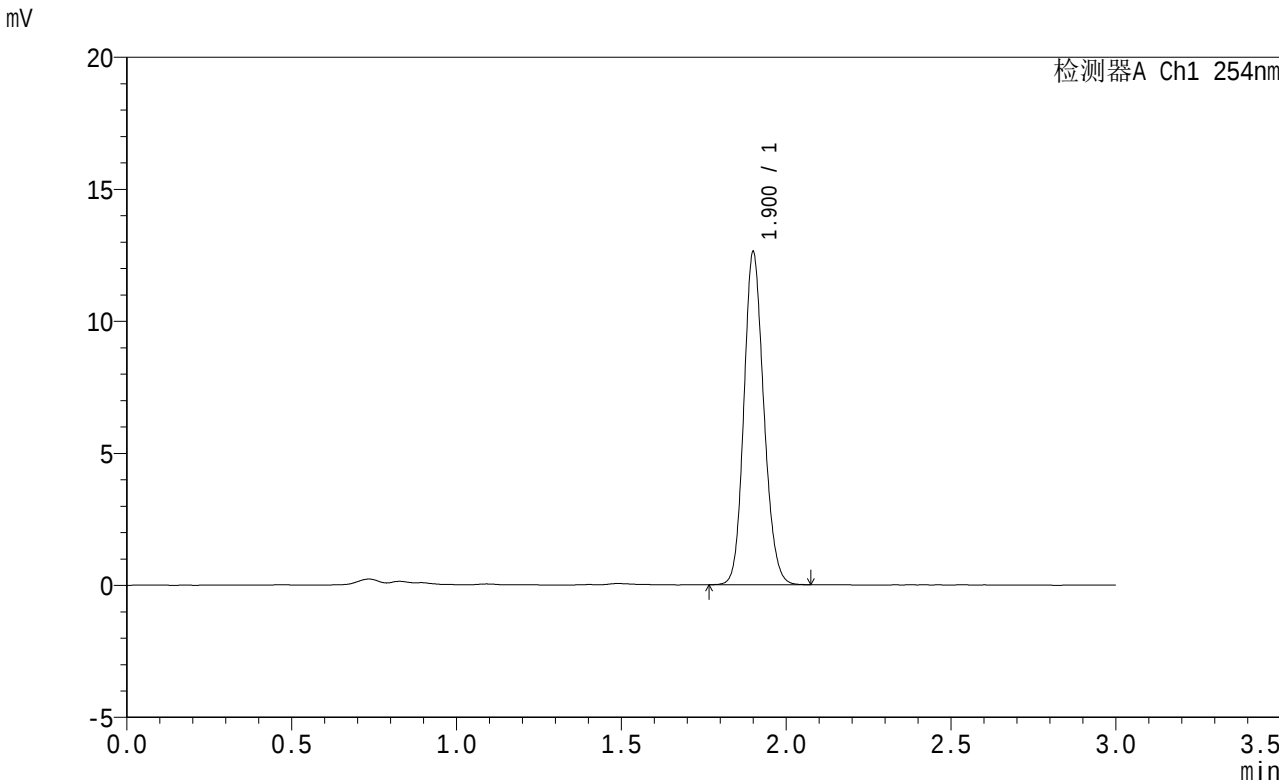

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	53077	100.000	12500	4742	1.150	--
总计		53077	100.000	12500			

图90 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1079-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p5-30min.l
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-41
: 50 μl
: 2025/01/13 16:05:02
: 2025/01/14 08:29:28
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

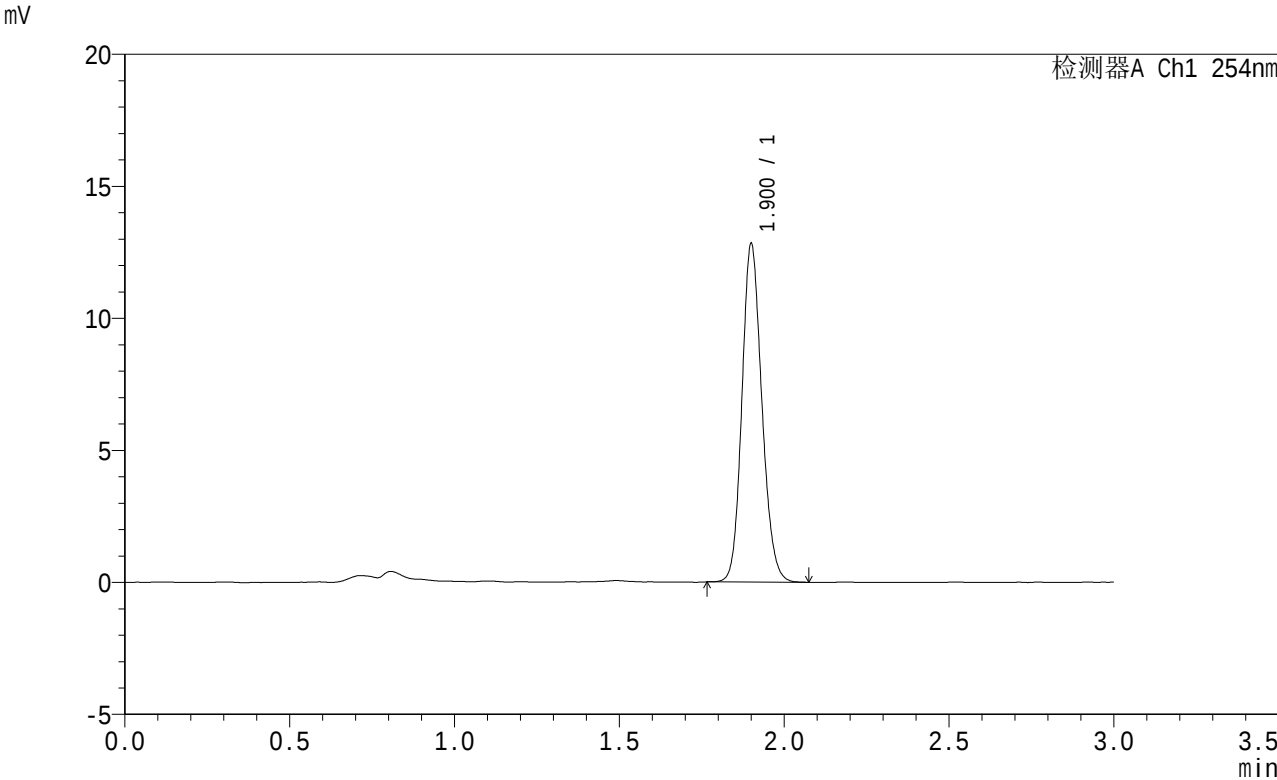

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	53912	100.000	12697	4756	1.148	--
总计		53912	100.000	12697			

图91 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1080-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p6-30min.l
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-50
: 50 μl
: 2025/01/13 16:08:28
: 2025/01/14 08:29:31
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

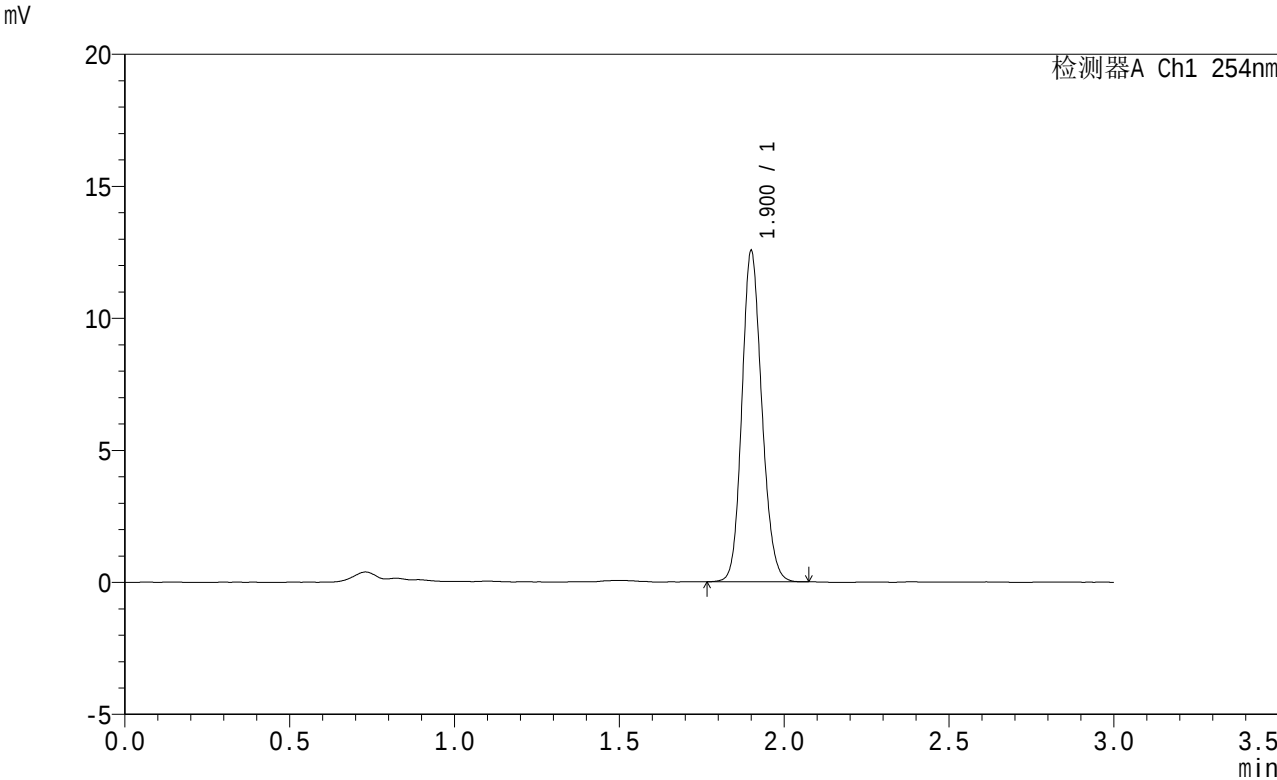

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	52761	100.000	12423	4750	1.147	--
总计		52761	100.000	12423			

图92 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1081-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p1-45min.l
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-6
: 50 μl
: 2025/01/13 16:11:55
: 2025/01/14 08:29:33
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

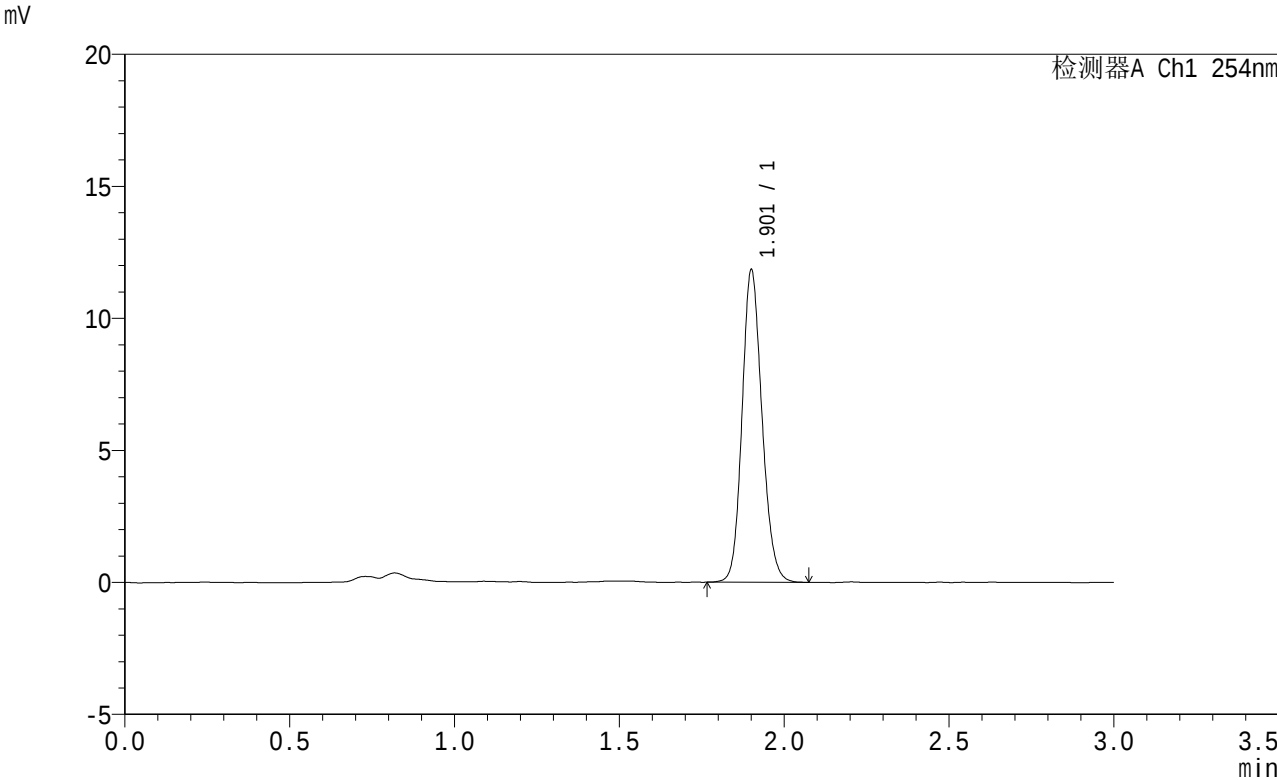

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	49812	100.000	11701	4763	1.151	--
总计		49812	100.000	11701			

图93 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1082-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p2-45min.l
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-15
: 50 μl
: 2025/01/13 16:15:21
: 2025/01/14 08:29:36
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

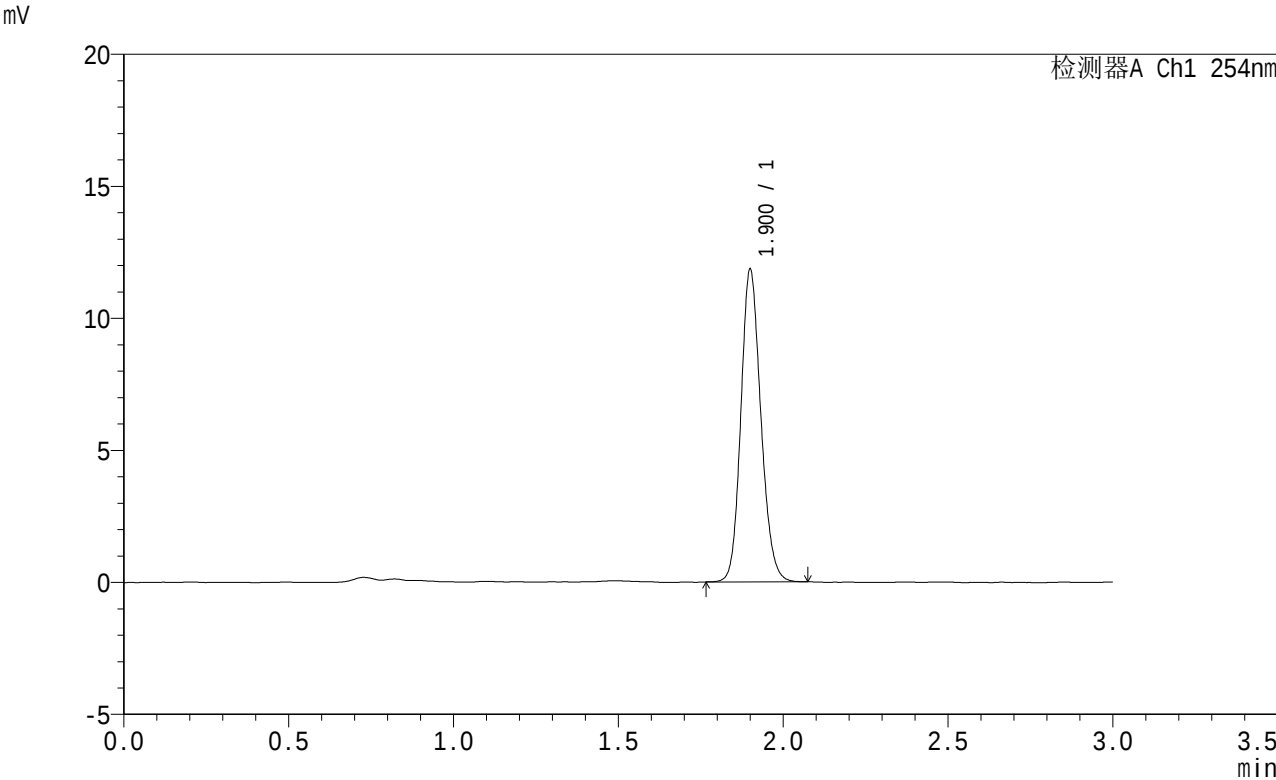

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	49920	100.000	11737	4740	1.153	--
总计		49920	100.000	11737			

图94 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1083-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p3-45min.l
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/13 16:18:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2025/01/14 08:29:39 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

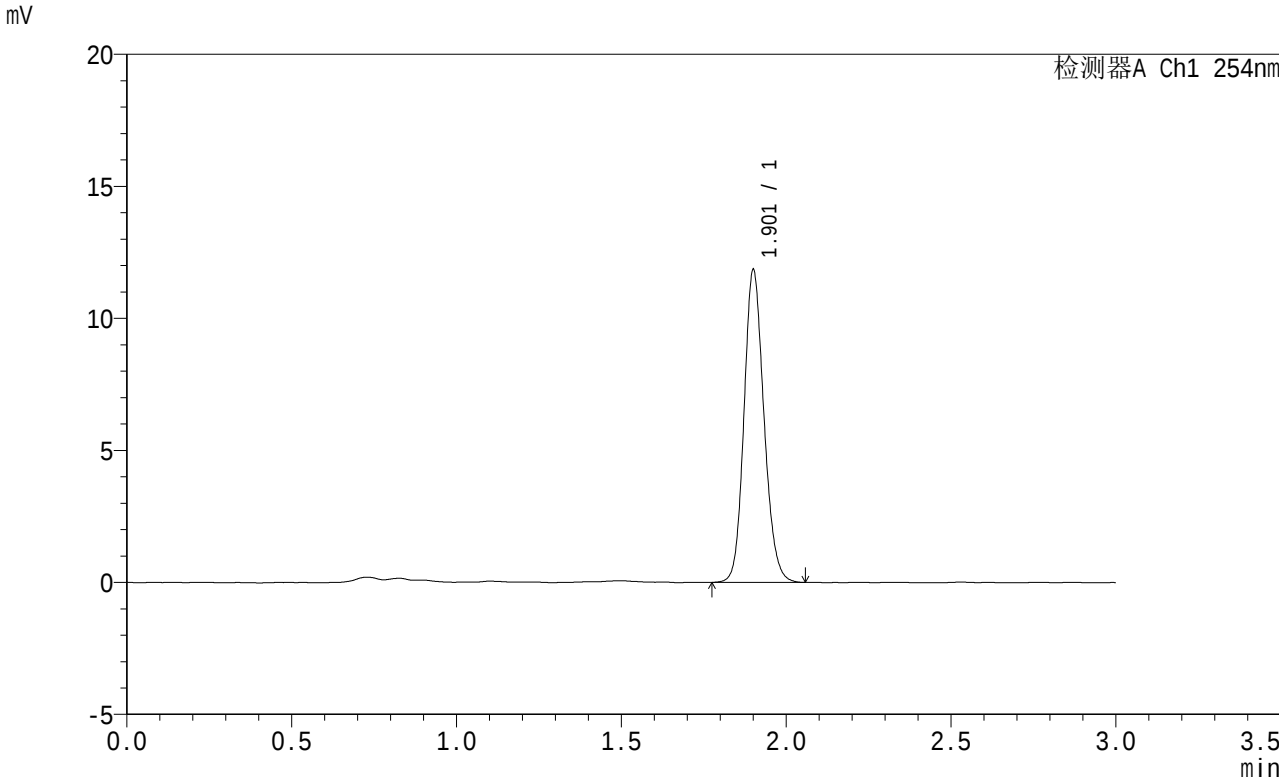

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	49850	100.000	11715	4756	1.151	--
总计		49850	100.000	11715			

图95 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1084-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p4-45min.l
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/13 16:22:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2025/01/14 08:29:42 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

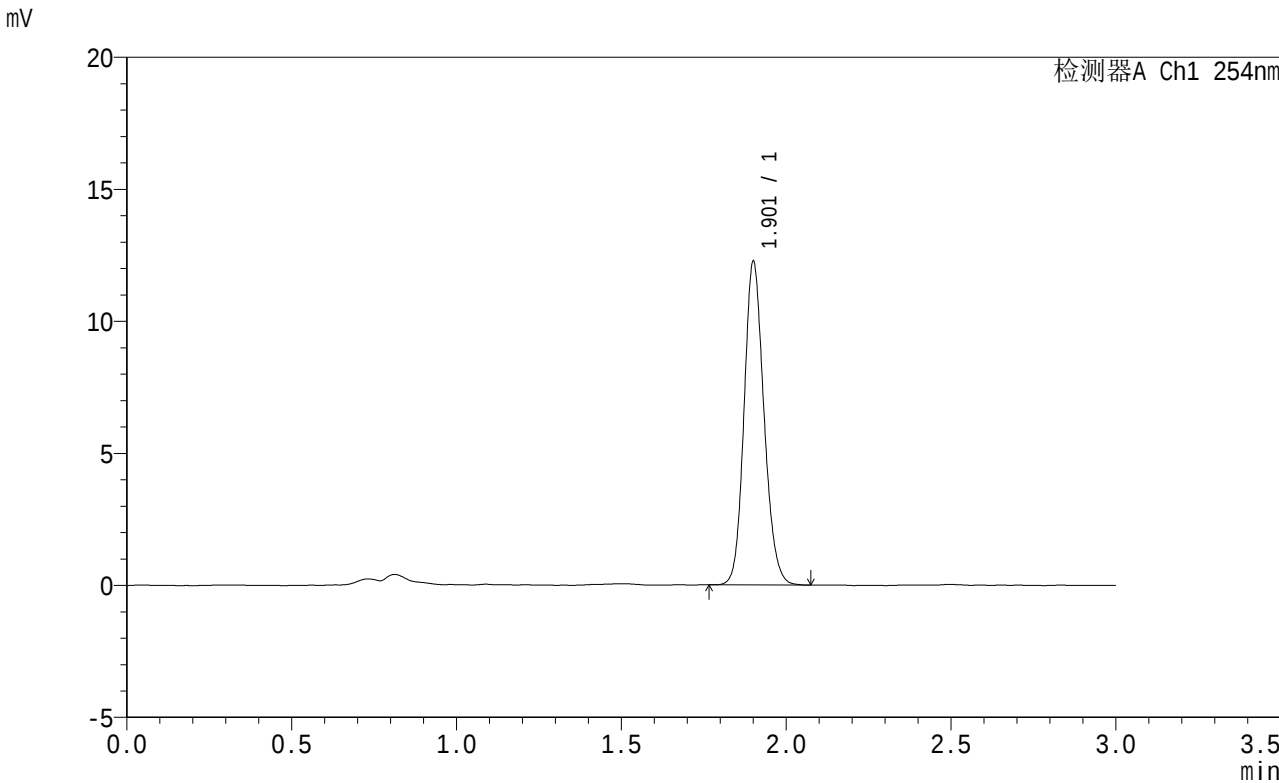

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	51492	100.000	12115	4763	1.151	--
总计		51492	100.000	12115			

图96 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1085-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p5-45min.l
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-42
: 50 μl
: 2025/01/13 16:25:40
: 2025/01/14 08:29:45
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

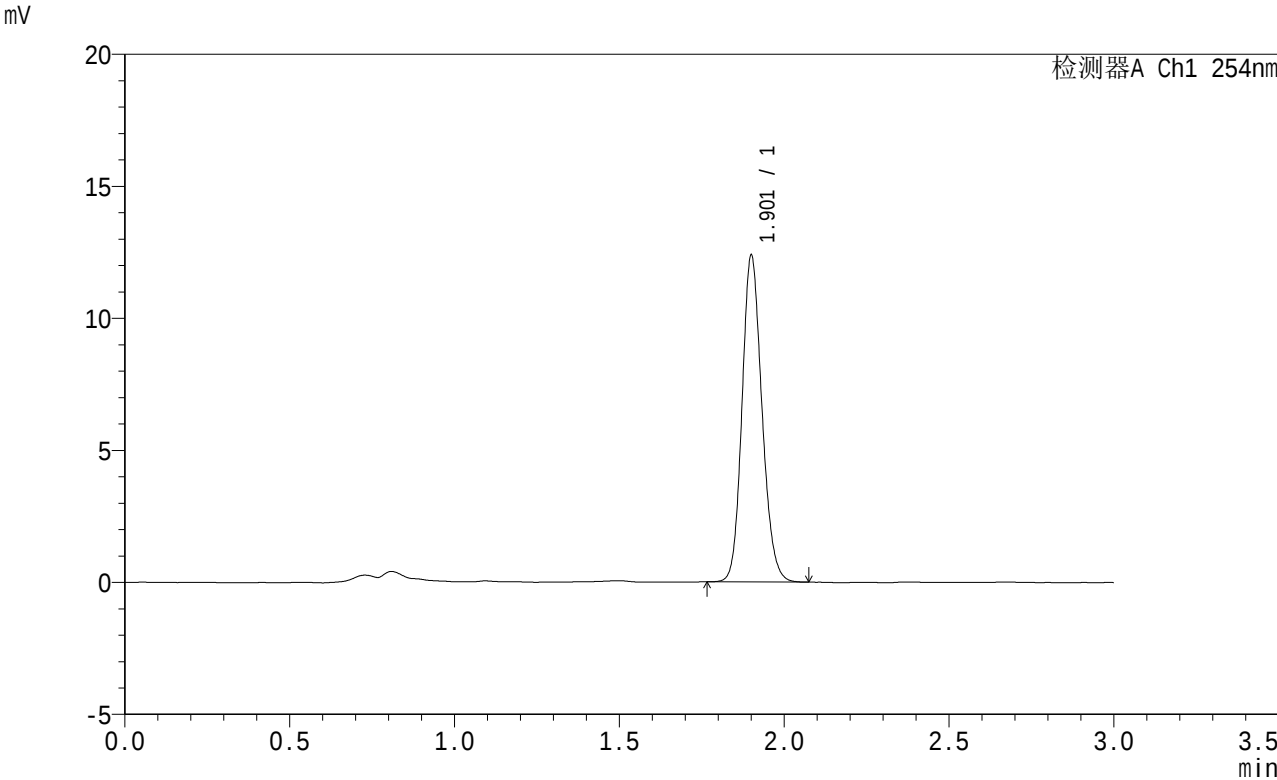

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	52043	100.000	12244	4753	1.154	--
总计		52043	100.000	12244			

图97 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1086-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p6-45min.l

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 16:29:06

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:29:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

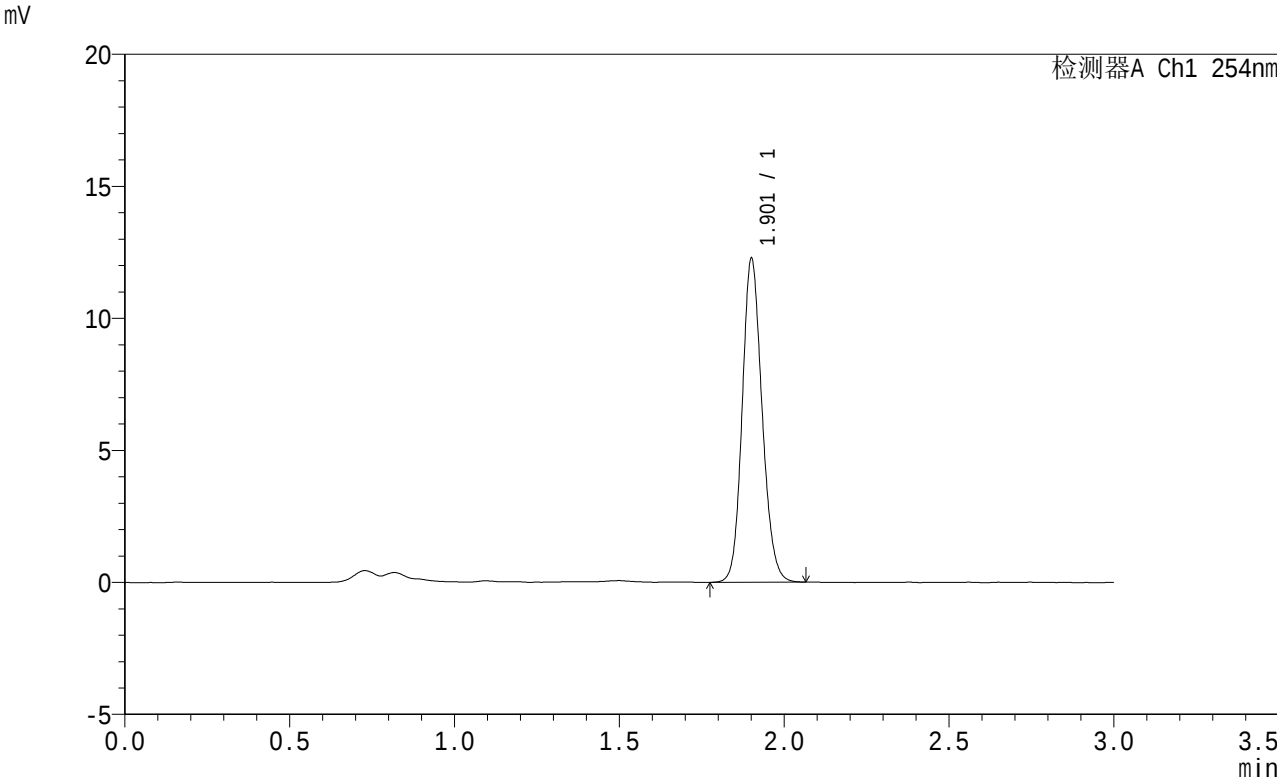

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	51439	100.000	12135	4801	1.145	--
总计		51439	100.000	12135			

图98 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1087-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p1-60min.l
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-7
: 50 μl
: 2025/01/13 16:32:33
: 2025/01/14 08:29:51
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

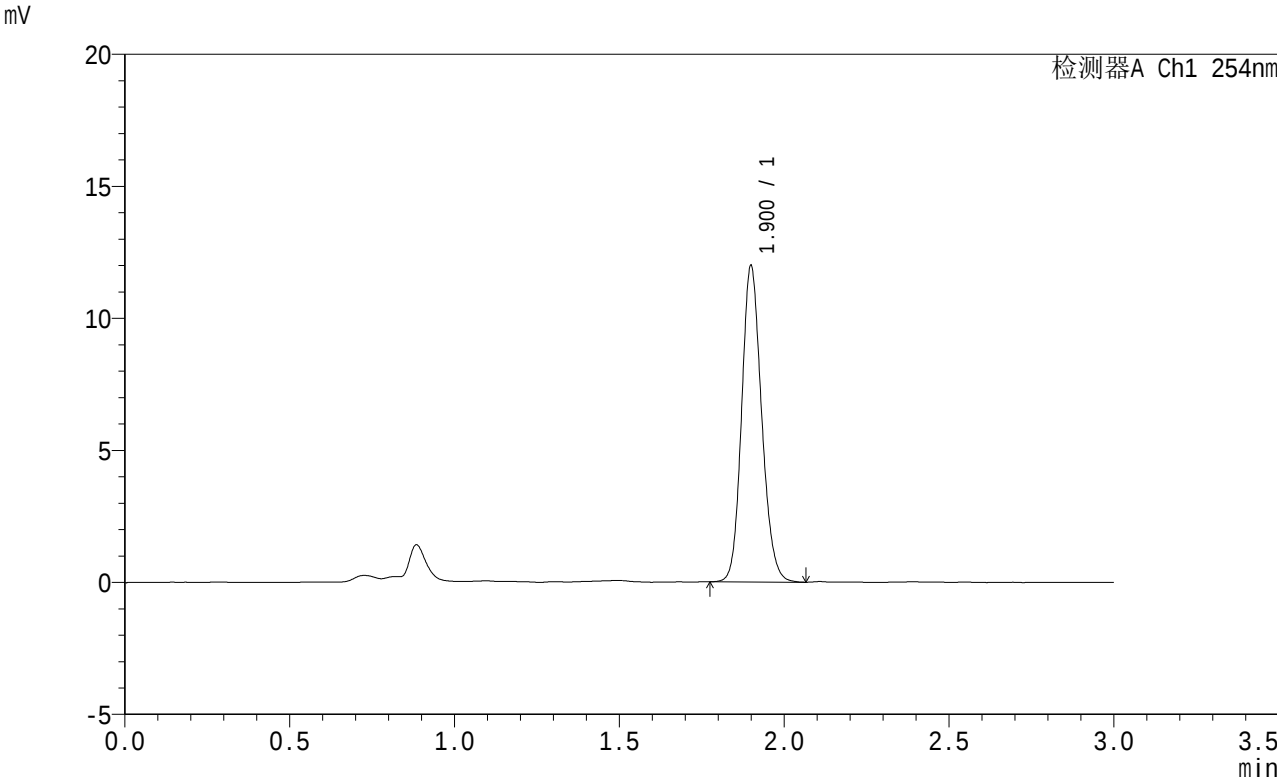

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	50562	100.000	11919	4731	1.153	--
总计		50562	100.000	11919			

图99 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1088-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p2-60min.l

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 16:35:59

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:29:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

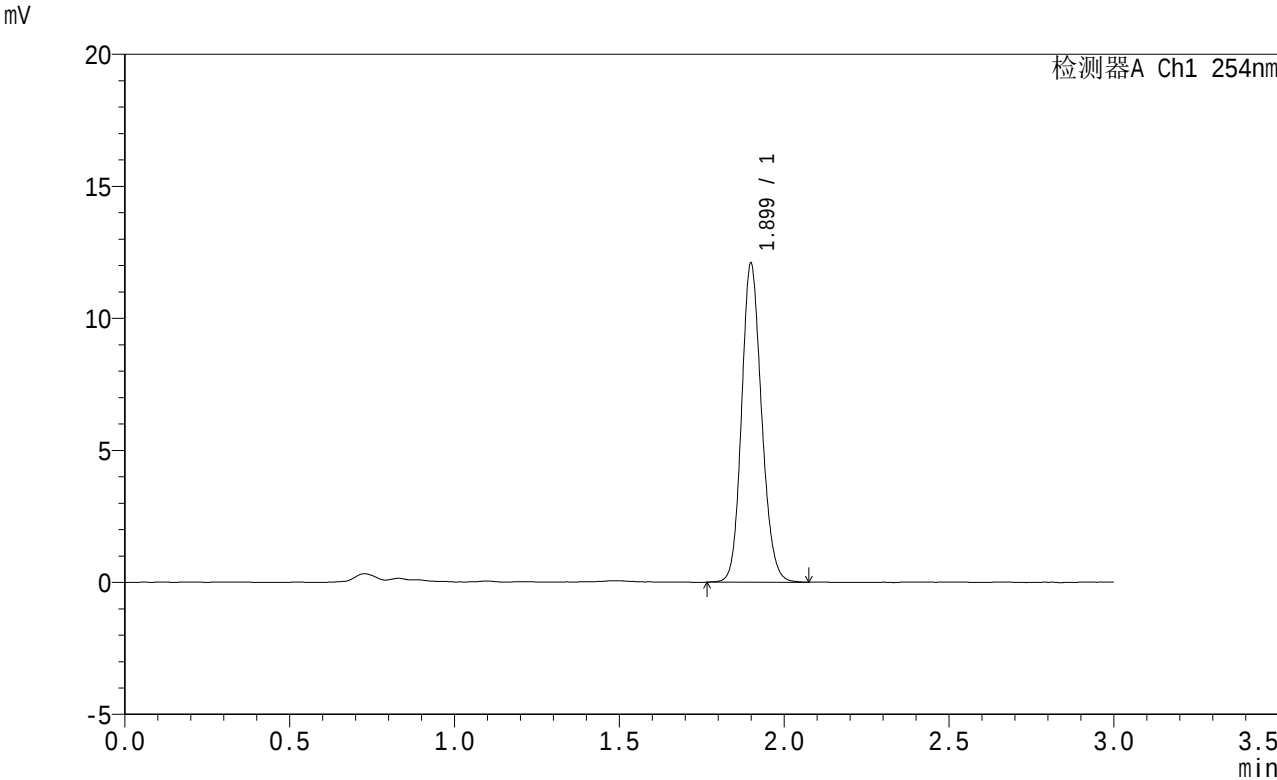

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	50981	100.000	12016	4723	1.147	--
总计		50981	100.000	12016			

图100 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1089-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p3-60min.l
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-25
: 50 μl
: 2025/01/13 16:39:26
: 2025/01/14 08:29:56
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

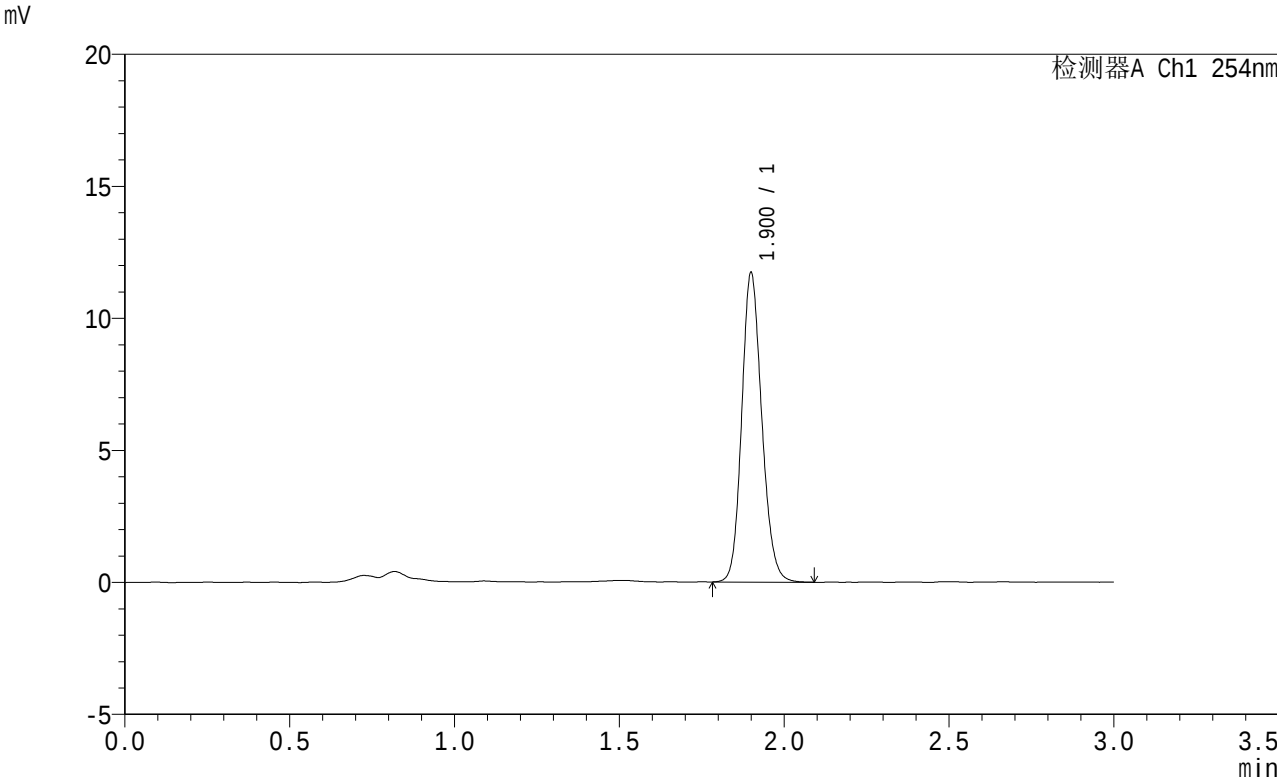

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	49595	100.000	11635	4713	1.154	--
总计		49595	100.000	11635			

图101 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1090-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p4-60min.l
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-34
: 50 μl
: 2025/01/13 16:42:52
: 2025/01/14 08:29:59
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

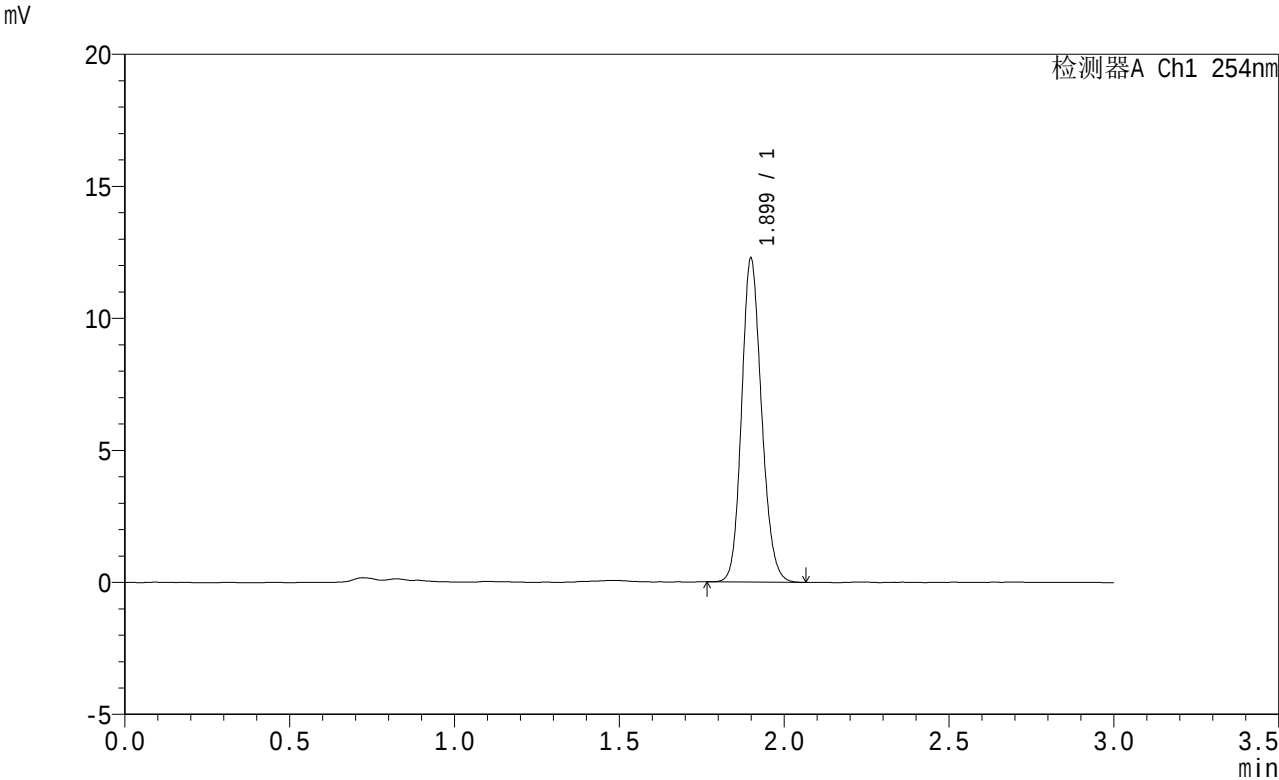

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	51637	100.000	12203	4743	1.150	--
总计		51637	100.000	12203			

图102 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1091-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p5-60min.l

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 16:46:22

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:30:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

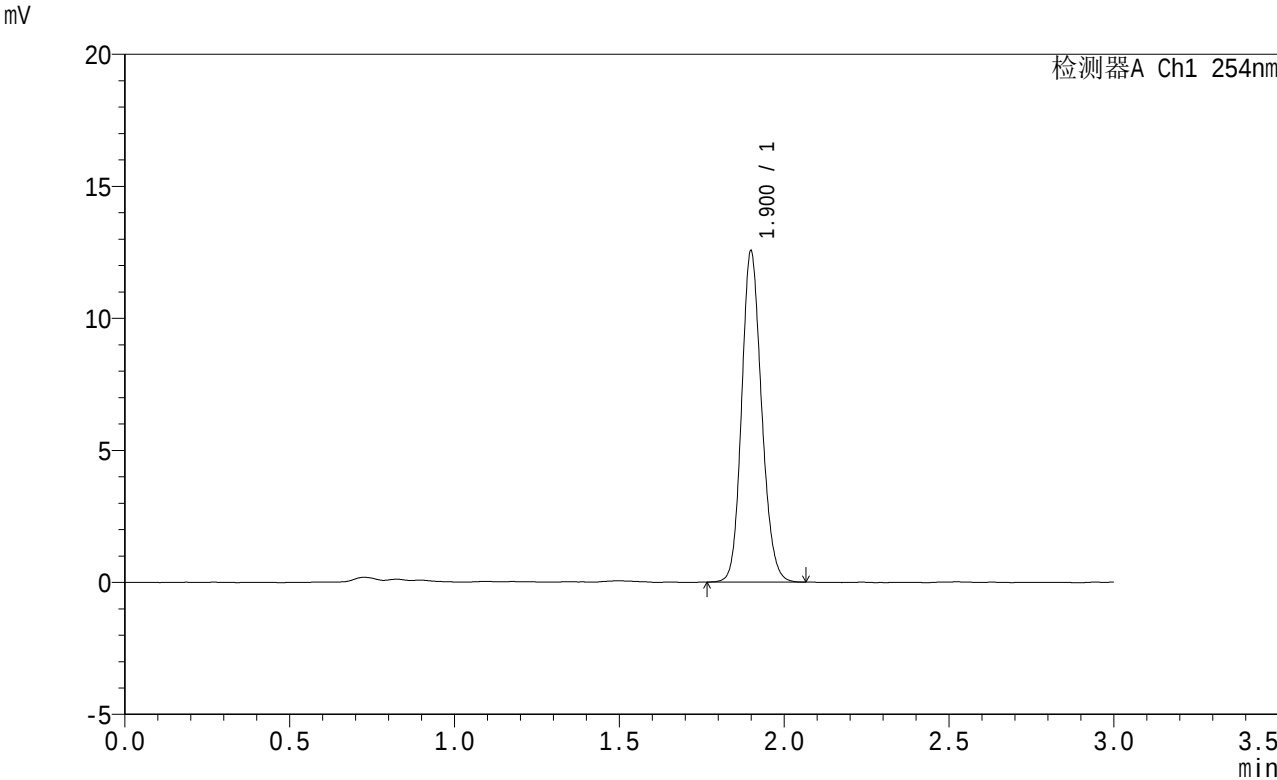

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	52759	100.000	12470	4754	1.148	--
总计		52759	100.000	12470			

图103 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1092-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p6-60min.l
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-52
: 50 μl
: 2025/01/13 16:49:49
: 2025/01/14 08:30:05
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

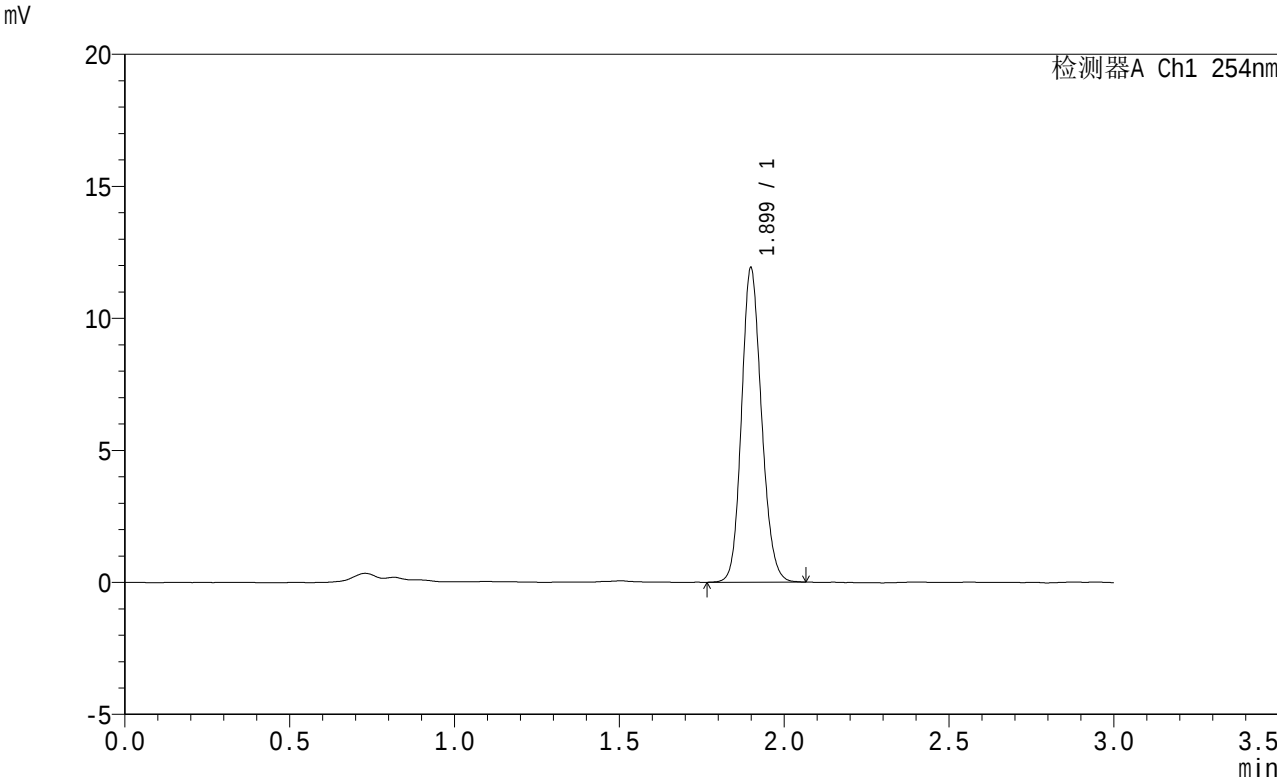

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	50306	100.000	11854	4710	1.146	--
总计		50306	100.000	11854			

图104 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1093-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p1-jx.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-8
: 50 μl
: 2025/01/13 16:53:16
: 2025/01/14 08:30:08
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

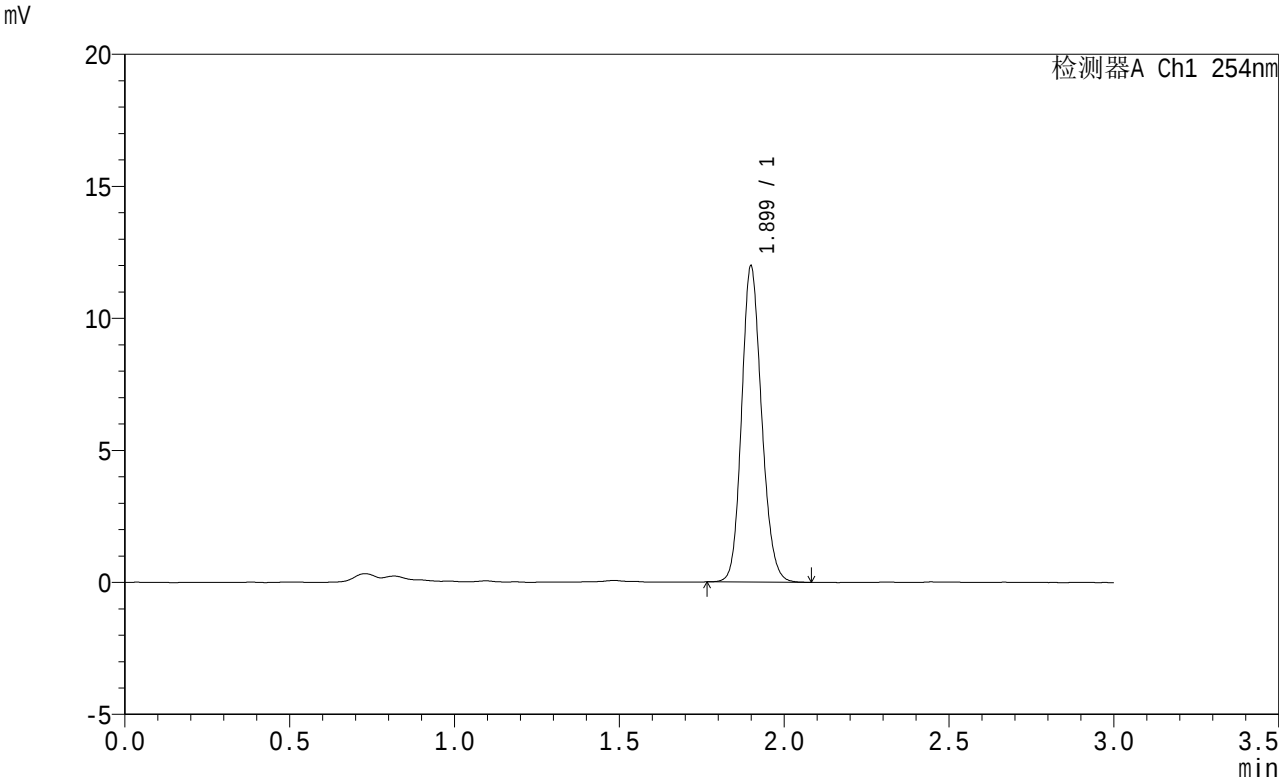

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	50504	100.000	11908	4735	1.150	--
总计		50504	100.000	11908			

图105 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1094-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p2-jx.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-17
: 50 μl
: 2025/01/13 16:56:43
: 2025/01/14 08:30:10
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

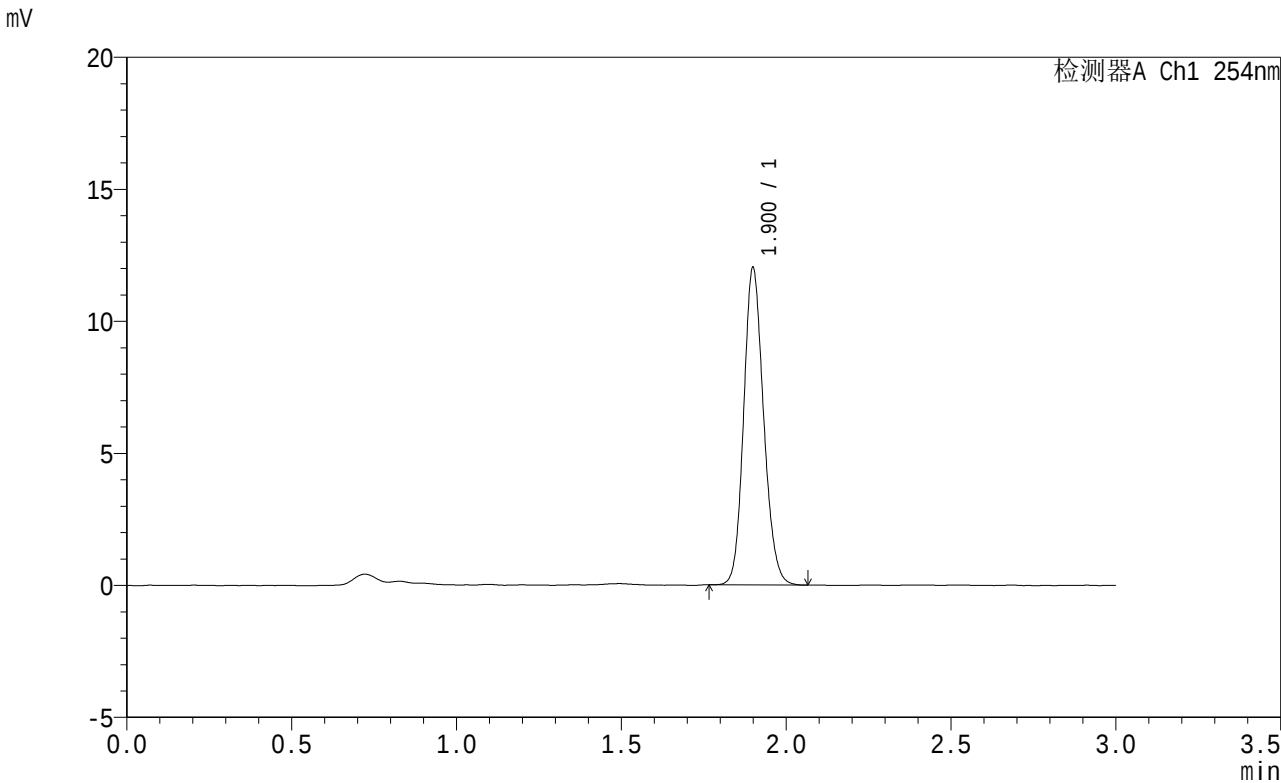

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	50608	100.000	11950	4737	1.150	--
总计		50608	100.000	11950			

图106 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1095-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-26

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 17:00:10

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:30:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

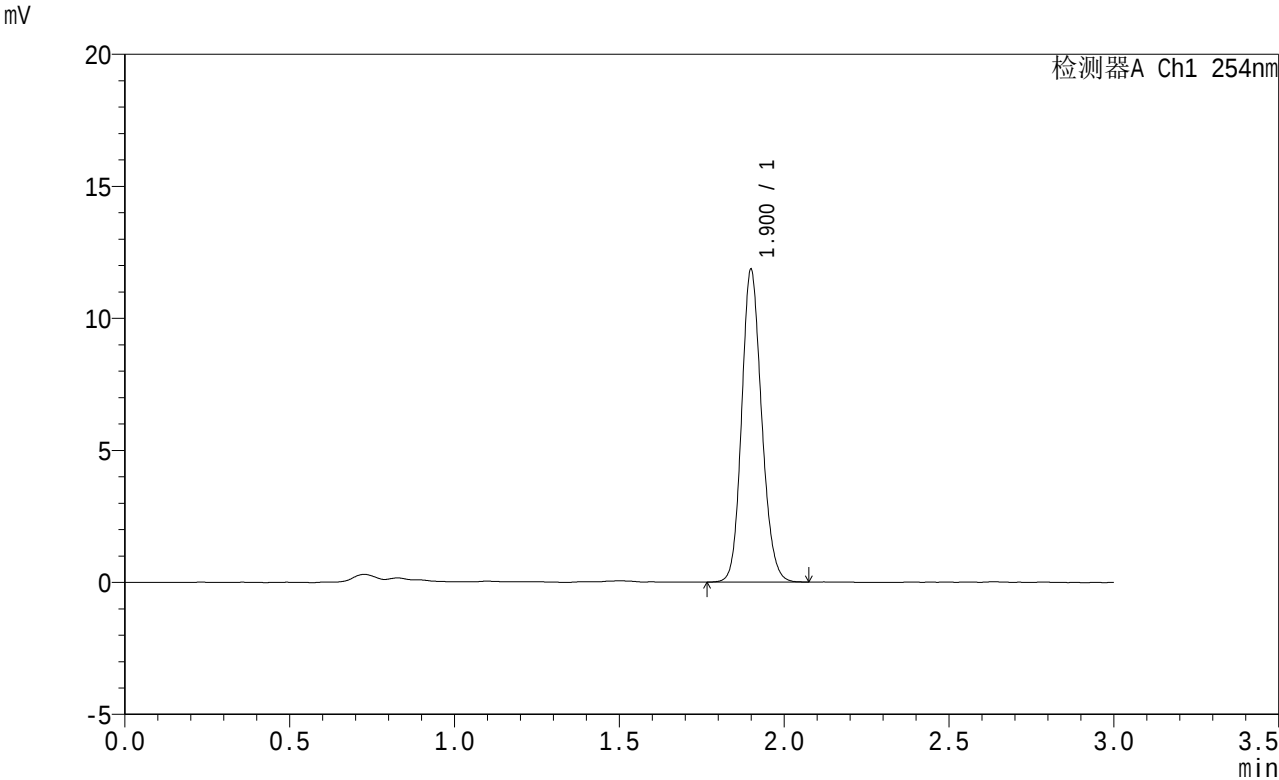

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	49921	100.000	11771	4739	1.149	--
总计		49921	100.000	11771			

图107 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1096-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p4-jx.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-35
: 50 μl
: 2025/01/13 17:03:36
: 2025/01/14 08:30:16
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

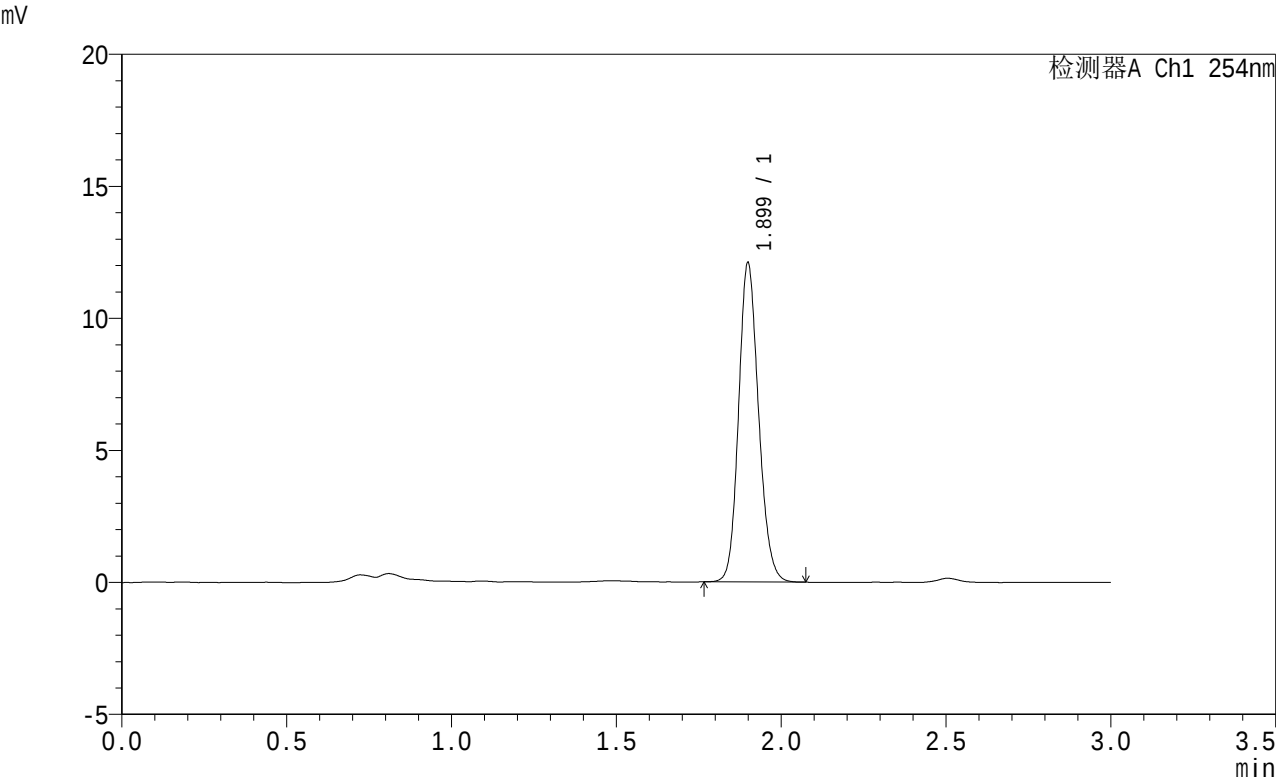

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	50938	100.000	12024	4732	1.150	--
总计		50938	100.000	12024			

图108 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-106/11-1097-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p5-jx.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
: 2-44
: 50 μl
: 2025/01/13 17:07:03
: 2025/01/14 08:30:19
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

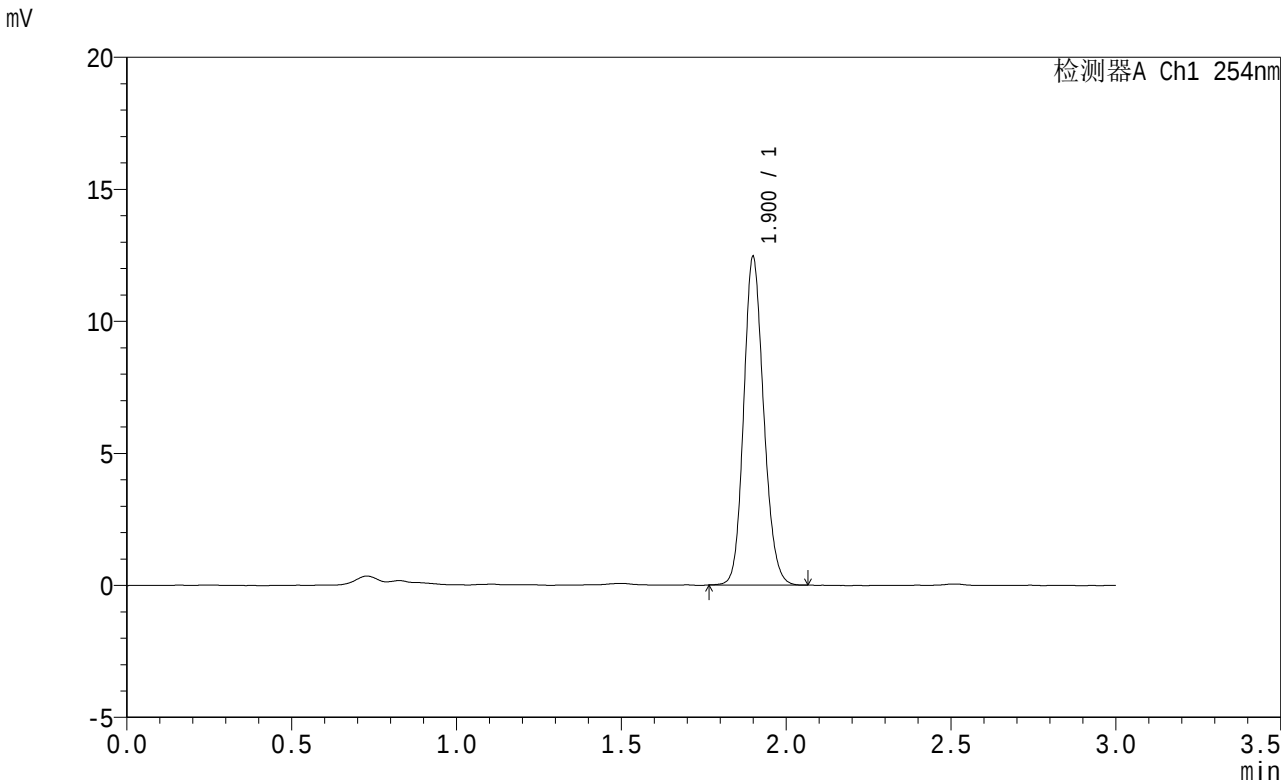

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	52366	100.000	12355	4743	1.148	--
总计		52366	100.000	12355			

图109 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1098-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-53

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 17:10:30

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:30:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

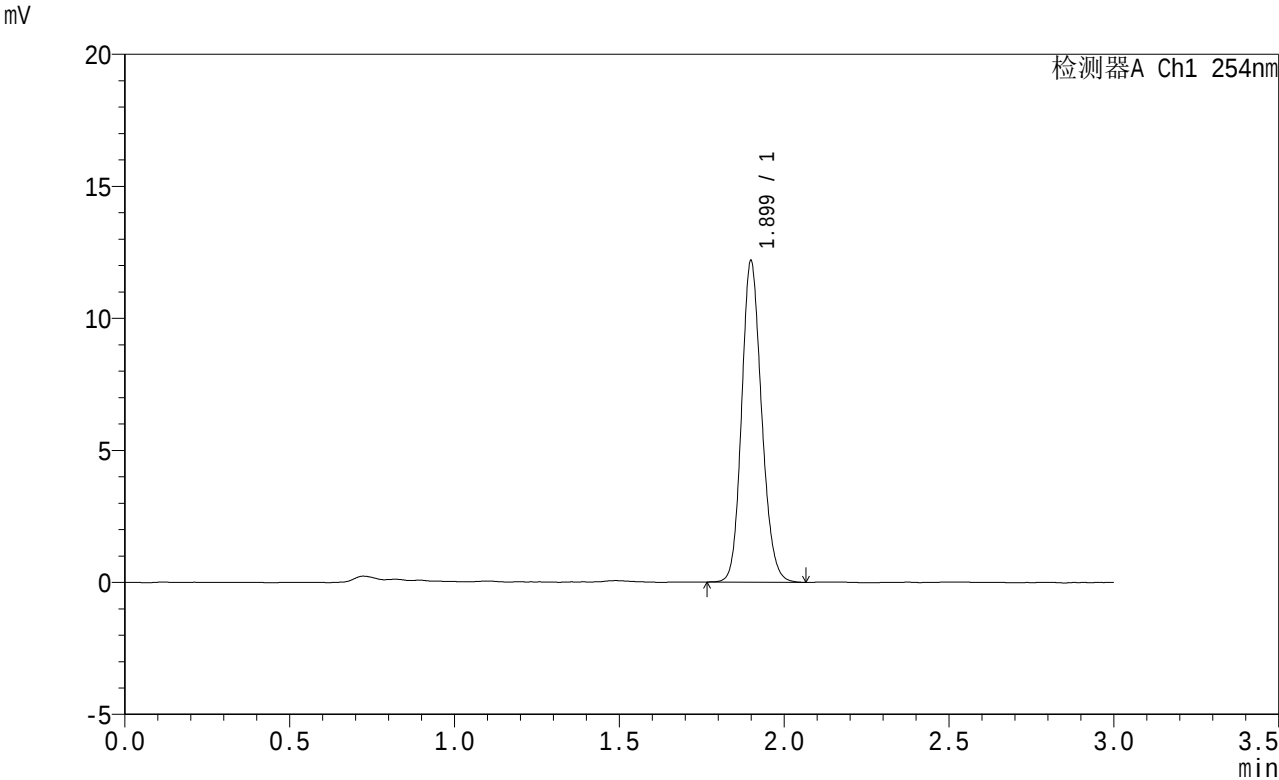

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	51279	100.000	12105	4742	1.152	--
总计		51279	100.000	12105			

图110 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1099-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 17:13:56

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:30:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

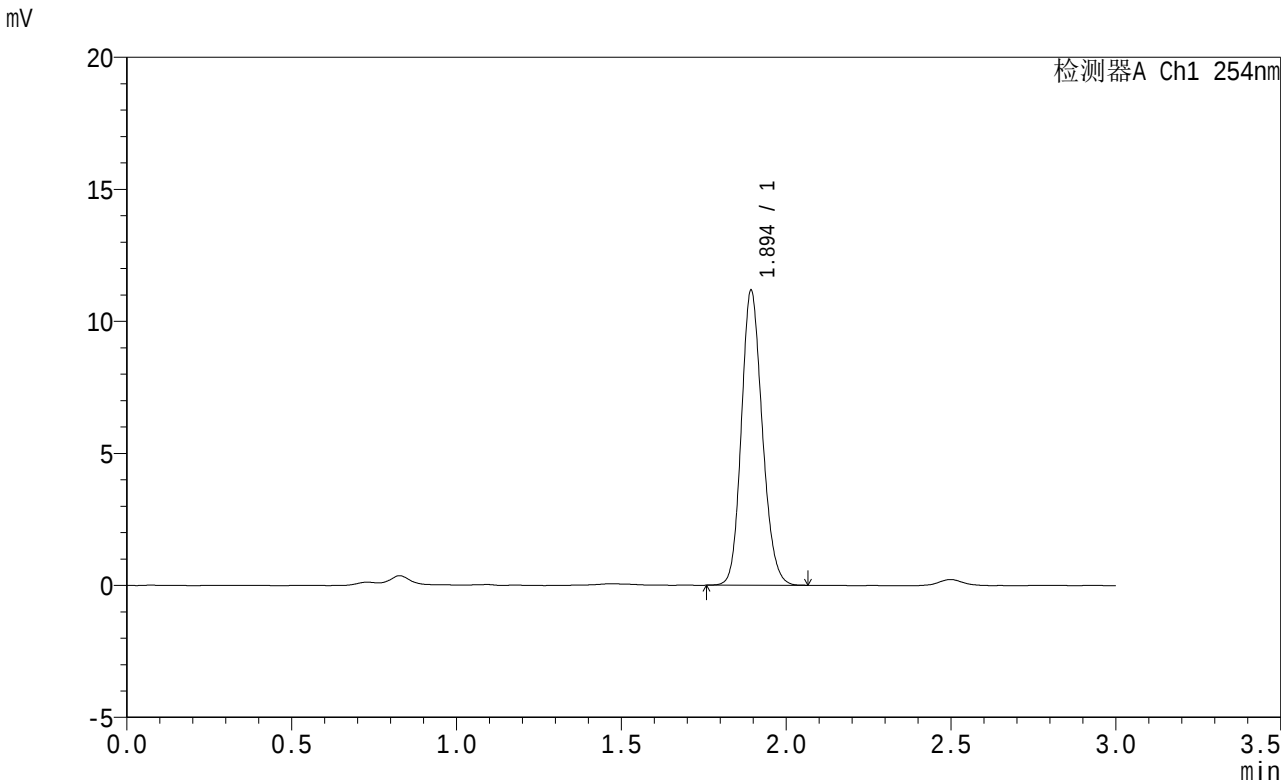

<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	49257	100.000	11112	4288	1.157	--
总计		49257	100.000	11112			

图111 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-106/11-1100-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-shui+0.22sdsjz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/13 17:17:23

处理时间(V2) : 2025/01/14 08:30:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

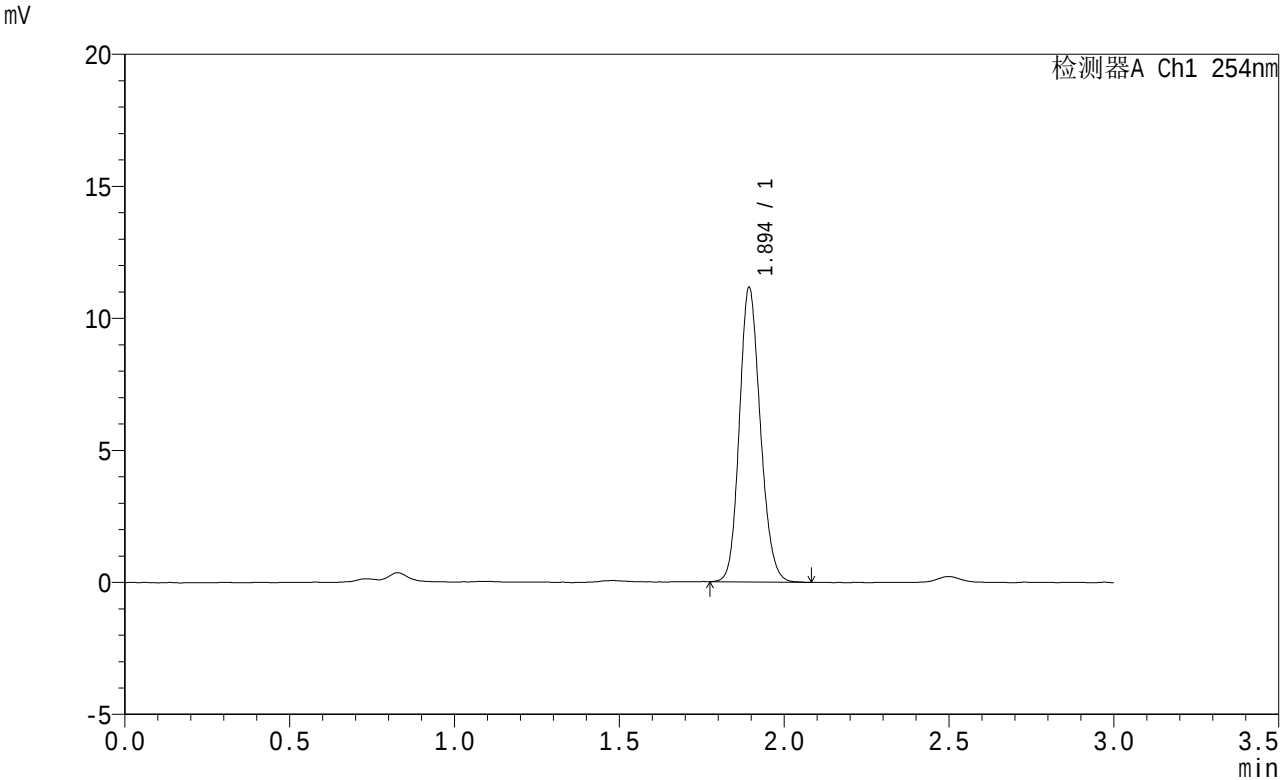

<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	49239	100.000	11103	4283	1.153	--
总计		49239	100.000	11103			

图112 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-shui(内含0.22%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2