




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1460-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 20:56:07 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:22:55 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

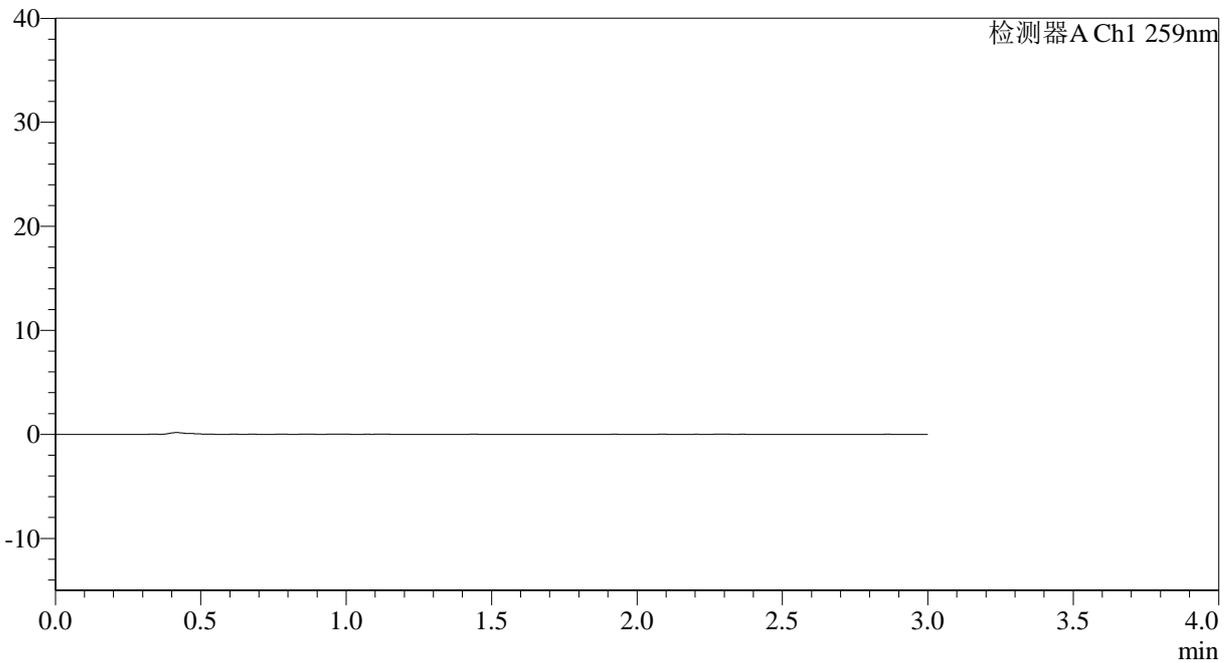

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1462-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 21:02:58 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:23:02 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

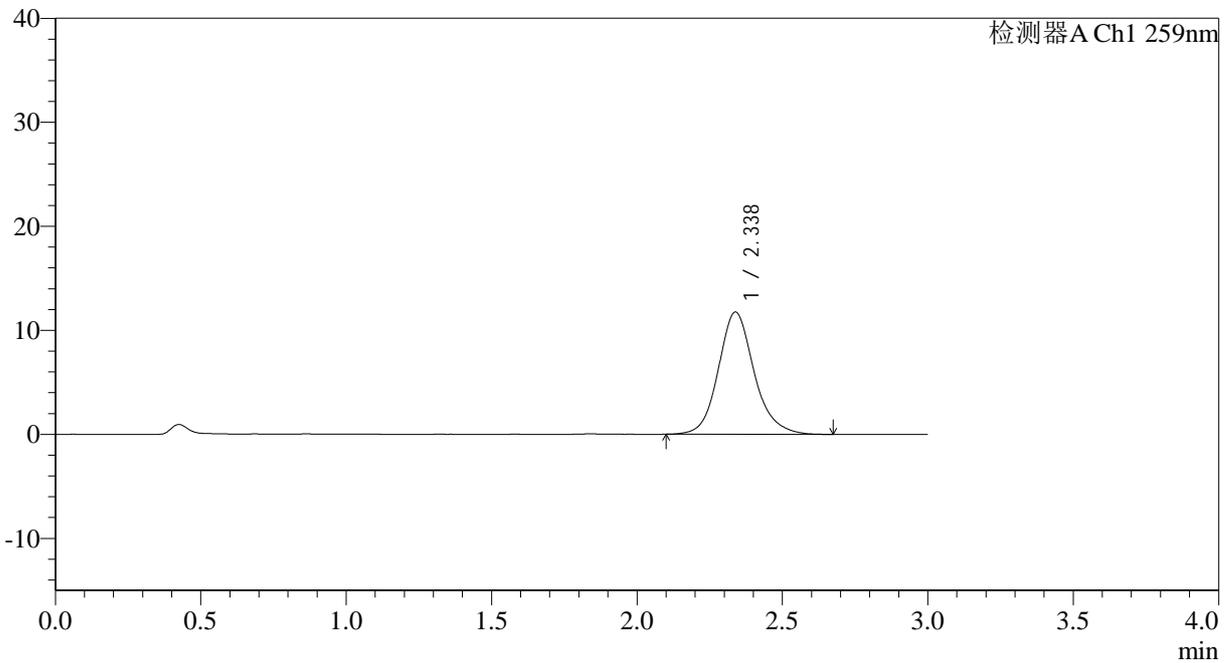

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.338	100662	100.000	11753	1834	1.145	--
总计		100662	100.000	11753			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1463-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 21:06:24 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:23:05 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

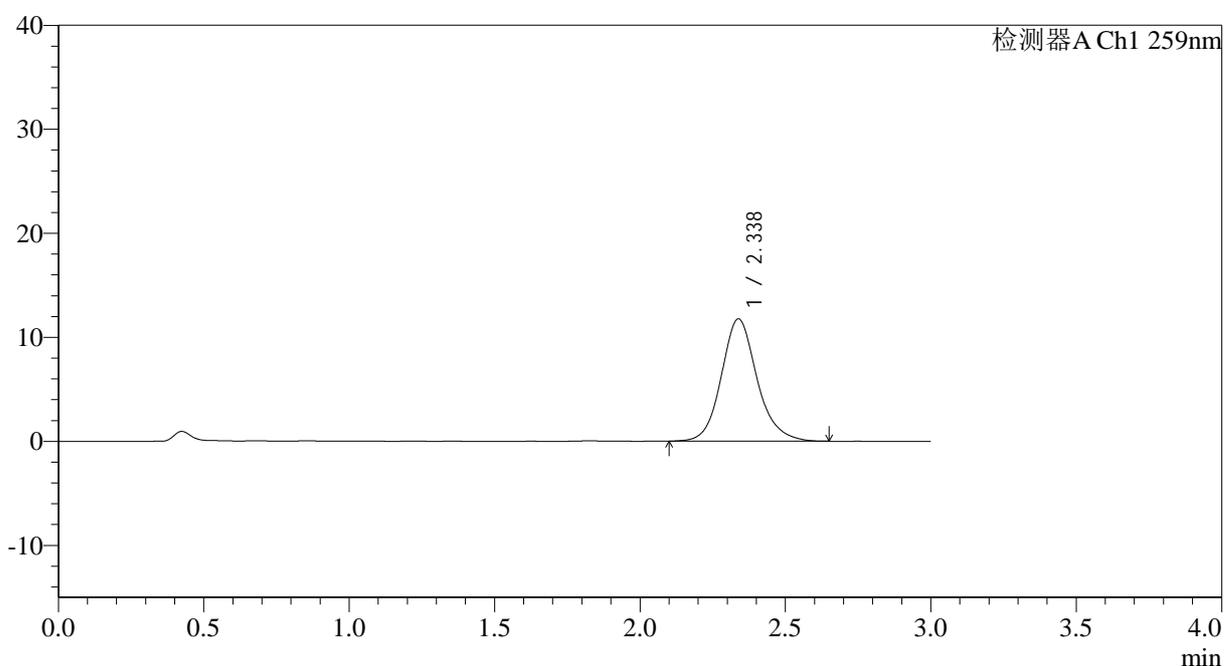

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.338	100521	100.000	11760	1840	1.141	--
总计		100521	100.000	11760			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1464-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 21:09:49 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:23:08 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

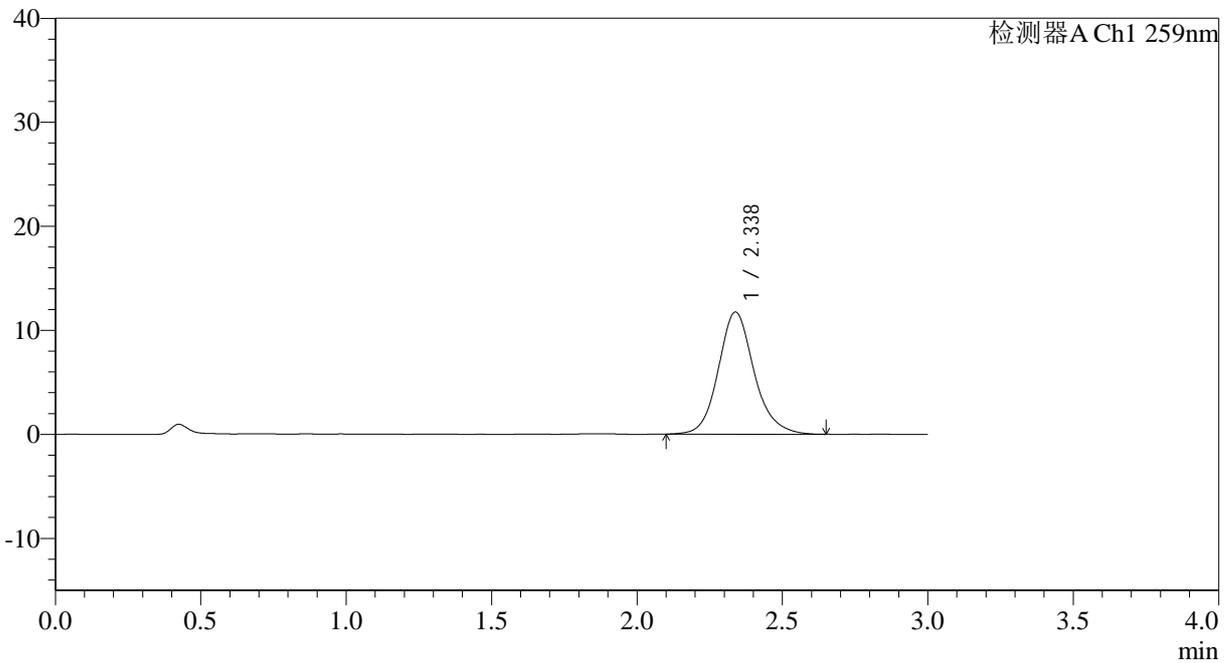

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.338	100661	100.000	11752	1834	1.141	--
总计		100661	100.000	11752			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1465-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 21:13:14 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:23:11 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

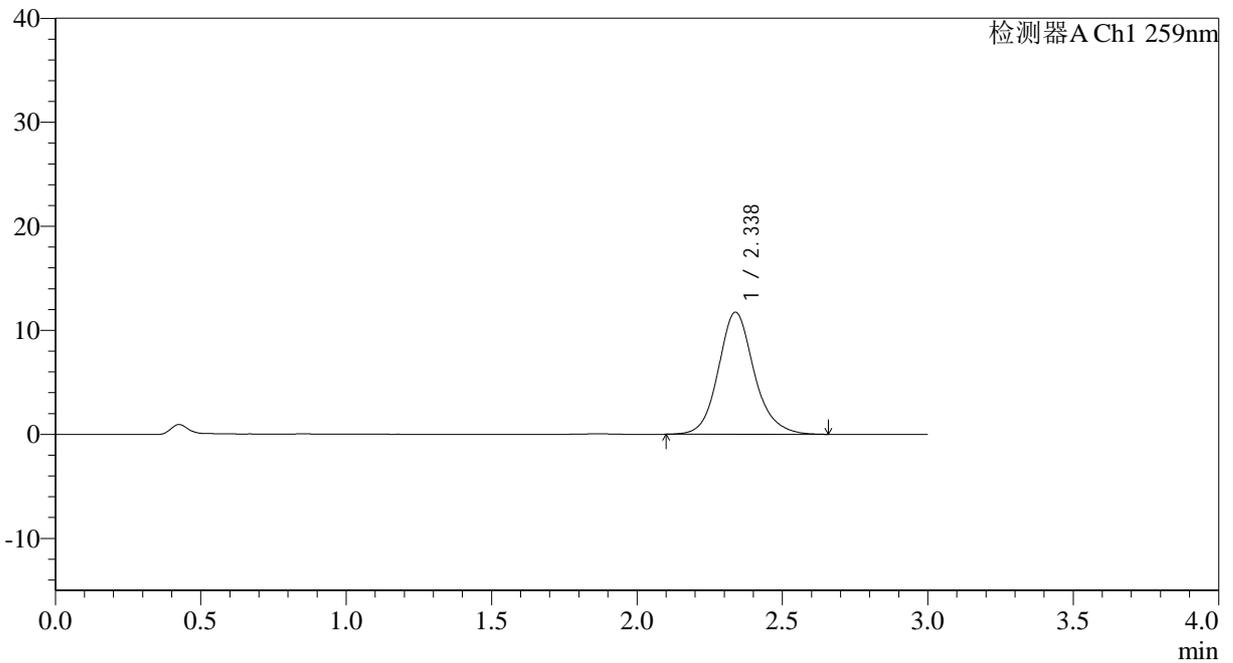

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.338	100603	100.000	11740	1835	1.141	--
总计		100603	100.000	11740			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1466-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 21:16:37 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:23:14 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

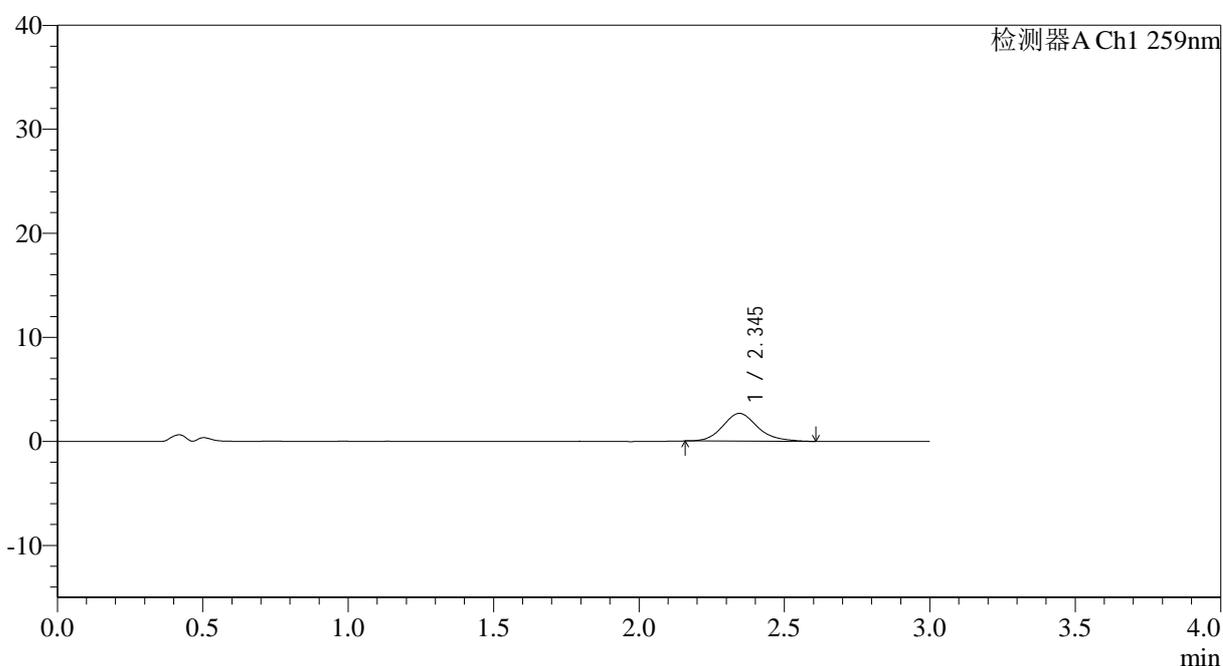

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	22342	100.000	2669	1899	1.183	--
总计		22342	100.000	2669			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1467-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 21:20:01 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:23:17 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

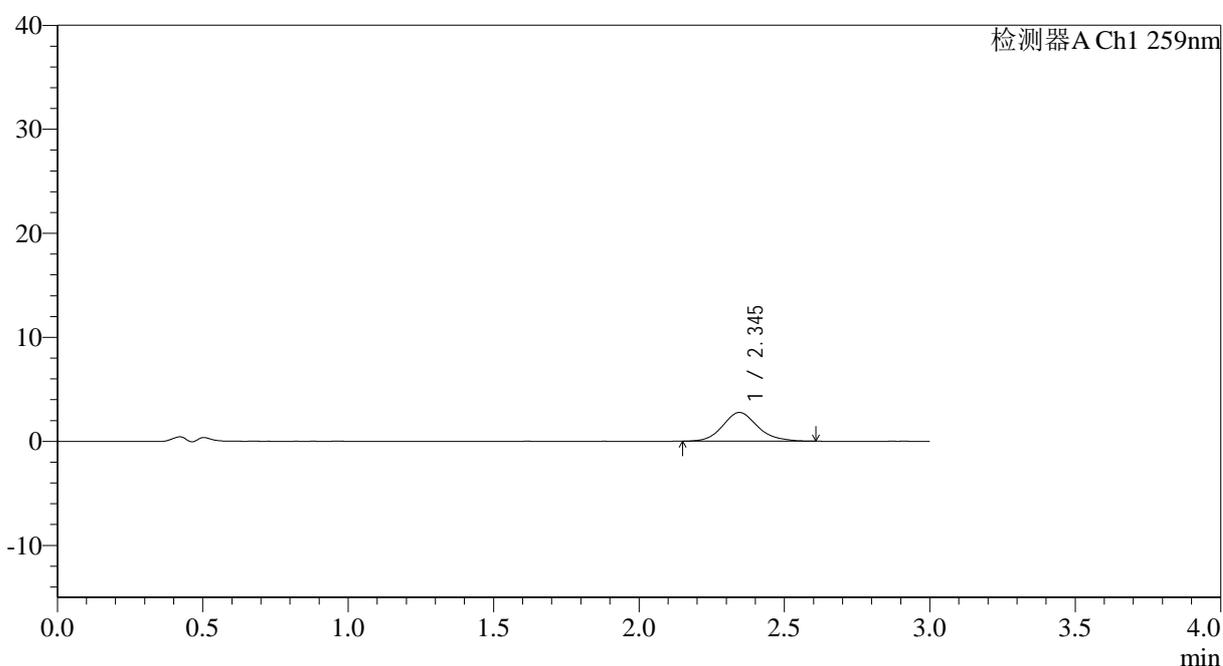

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	23213	100.000	2766	1872	1.146	--
总计		23213	100.000	2766			

图8 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1468-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 21:23:25 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:23:20 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

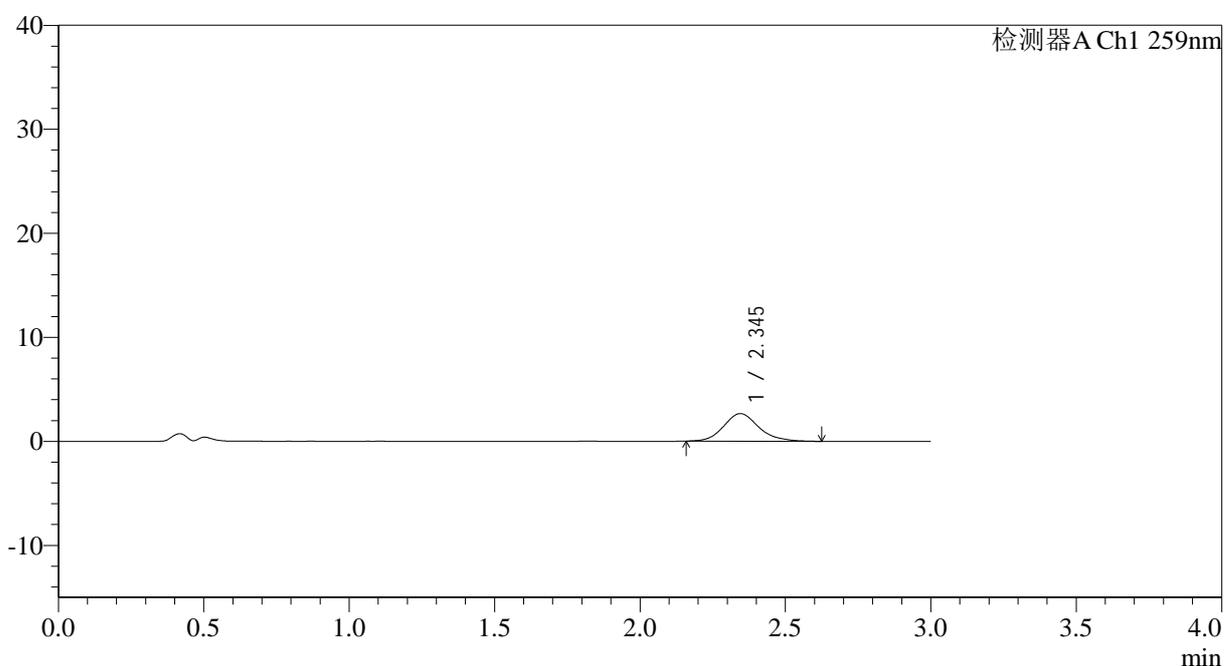

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	22426	100.000	2654	1882	1.159	--
总计		22426	100.000	2654			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1469-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 21:26:49 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:23:23 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

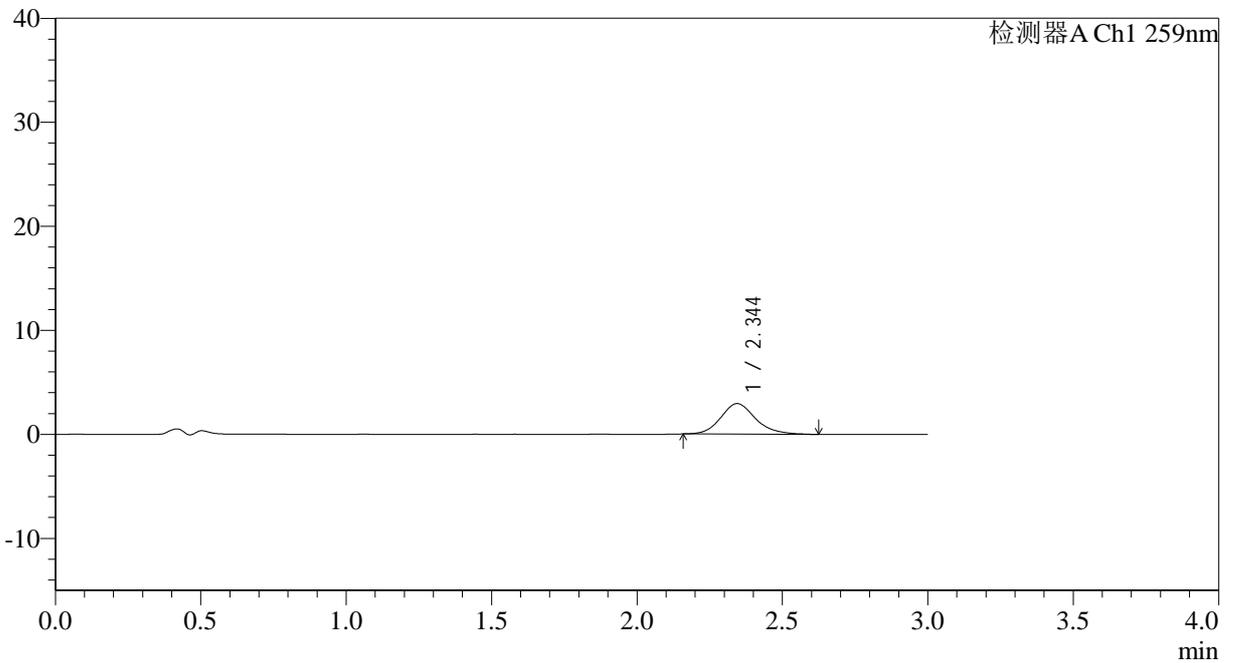

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.344	24565	100.000	2934	1904	1.176	--
总计		24565	100.000	2934			

图10 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-浆法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1473-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 21:40:24 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:23:34 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

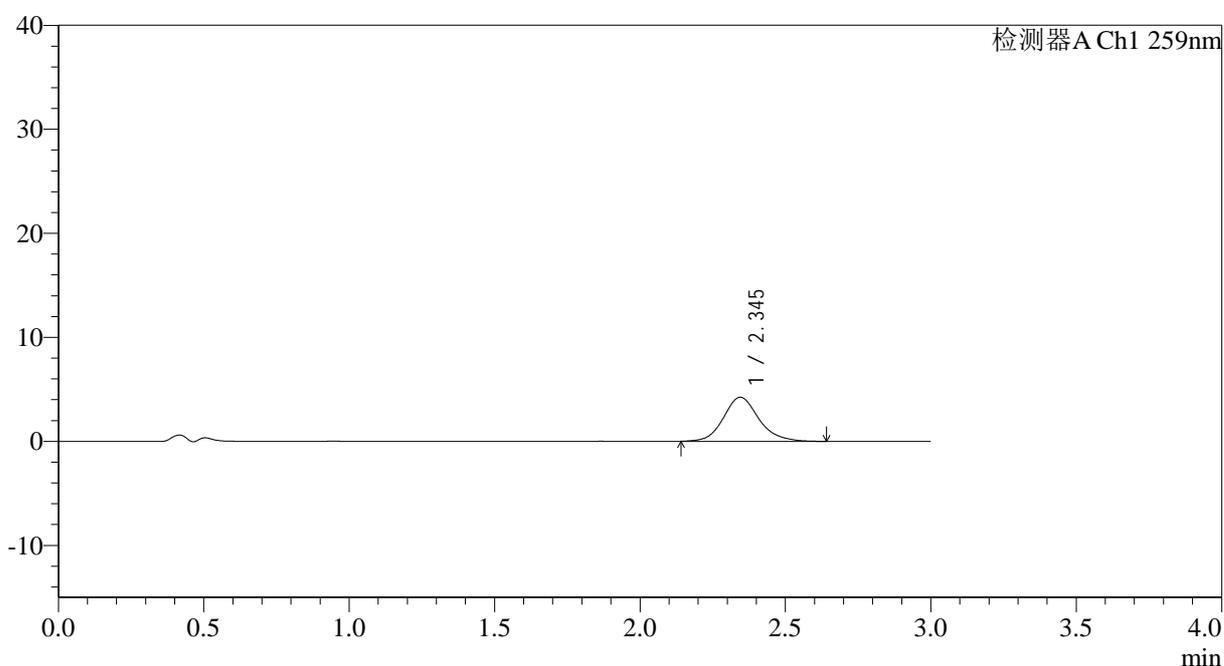

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	36005	100.000	4240	1876	1.150	--
总计		36005	100.000	4240			

图14 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1474-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 21:43:48 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:23:37 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

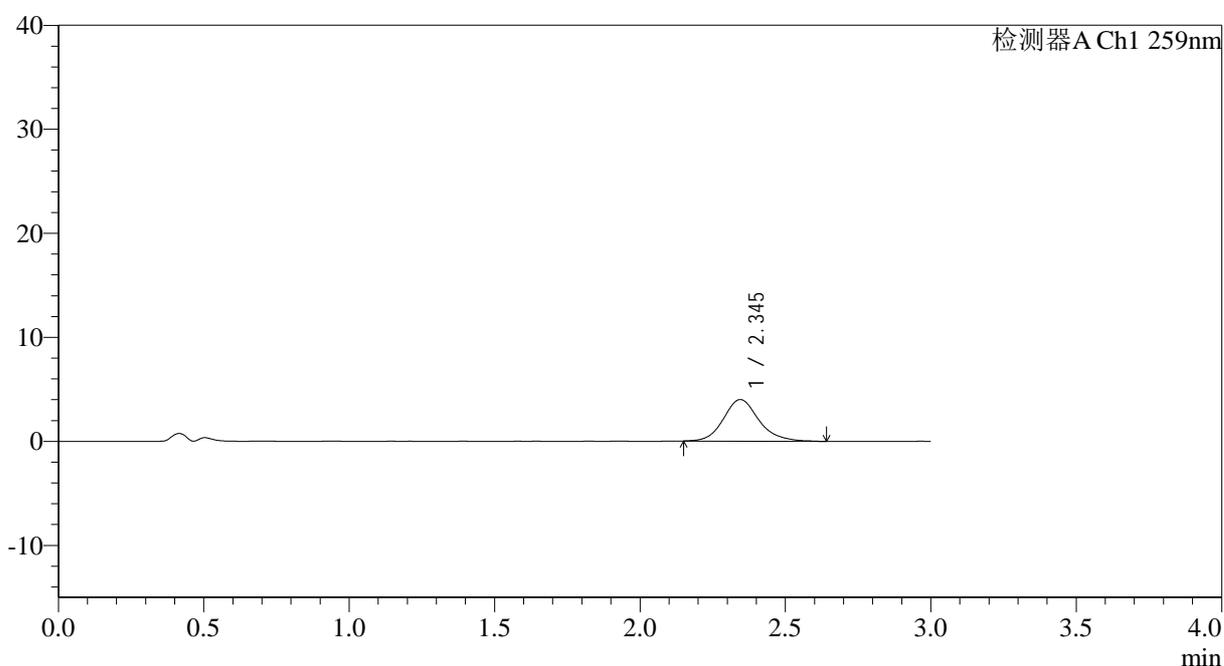

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	33895	100.000	3997	1893	1.157	--
总计		33895	100.000	3997			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1475-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 21:47:12 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:23:40 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

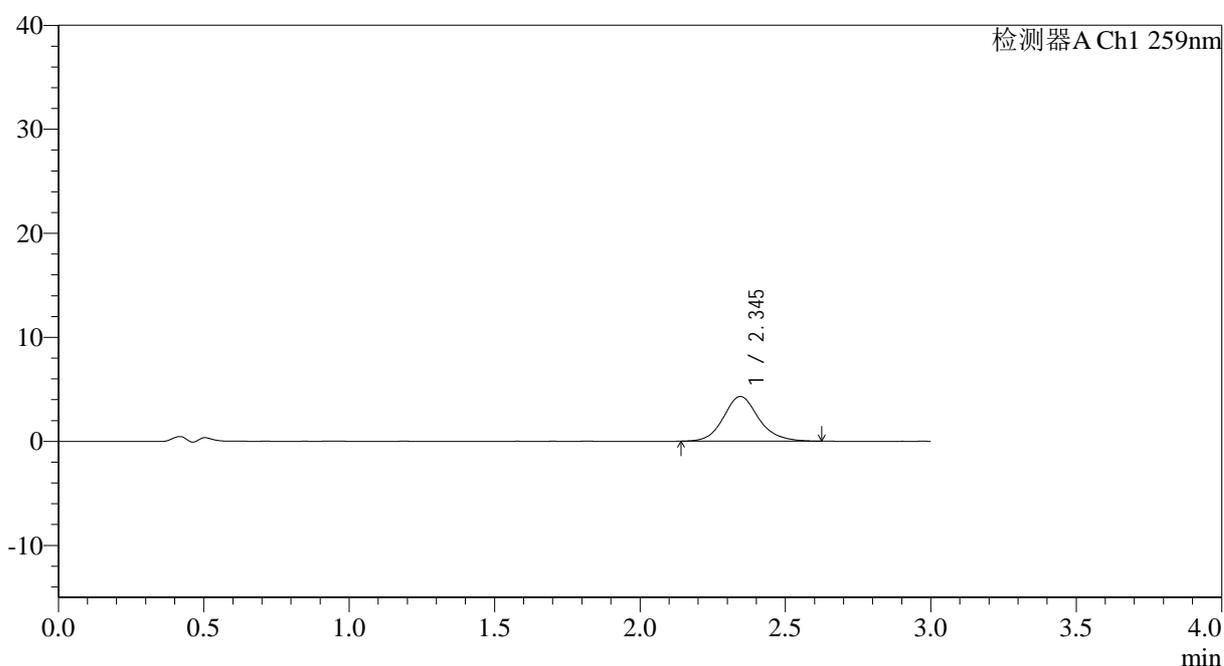

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	36227	100.000	4296	1927	1.135	--
总计		36227	100.000	4296			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1476-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 21:50:36 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:23:43 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

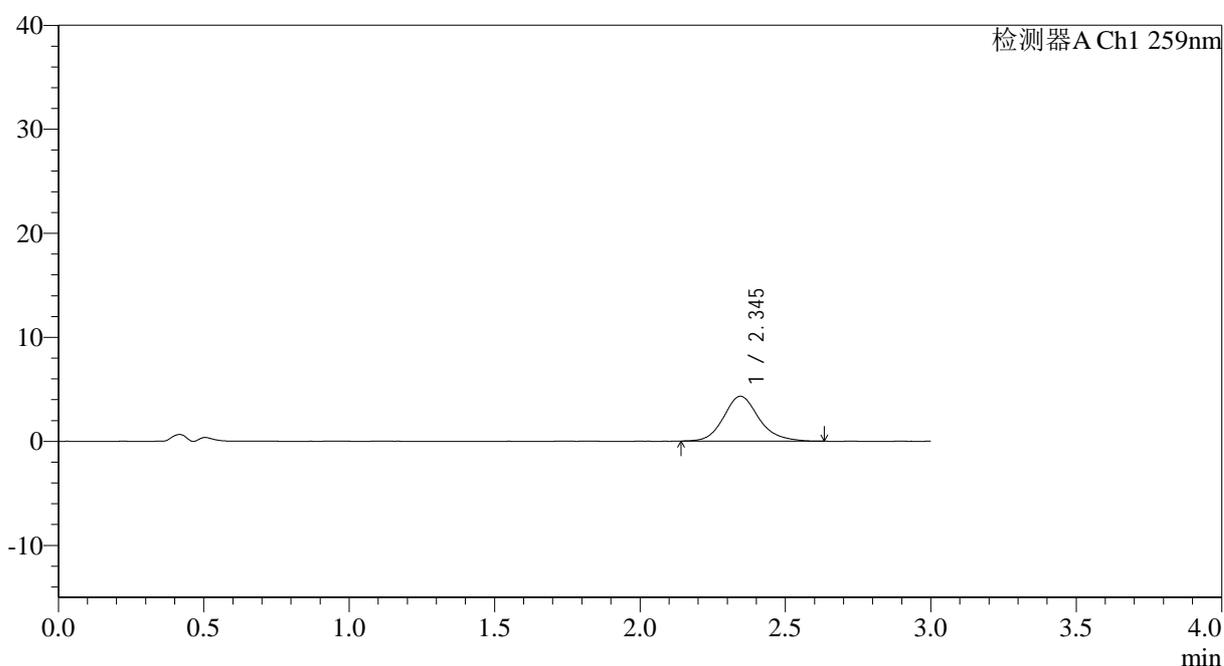

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	36543	100.000	4318	1896	1.159	--
总计		36543	100.000	4318			

图17 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1477-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 21:54:01 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:23:46 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

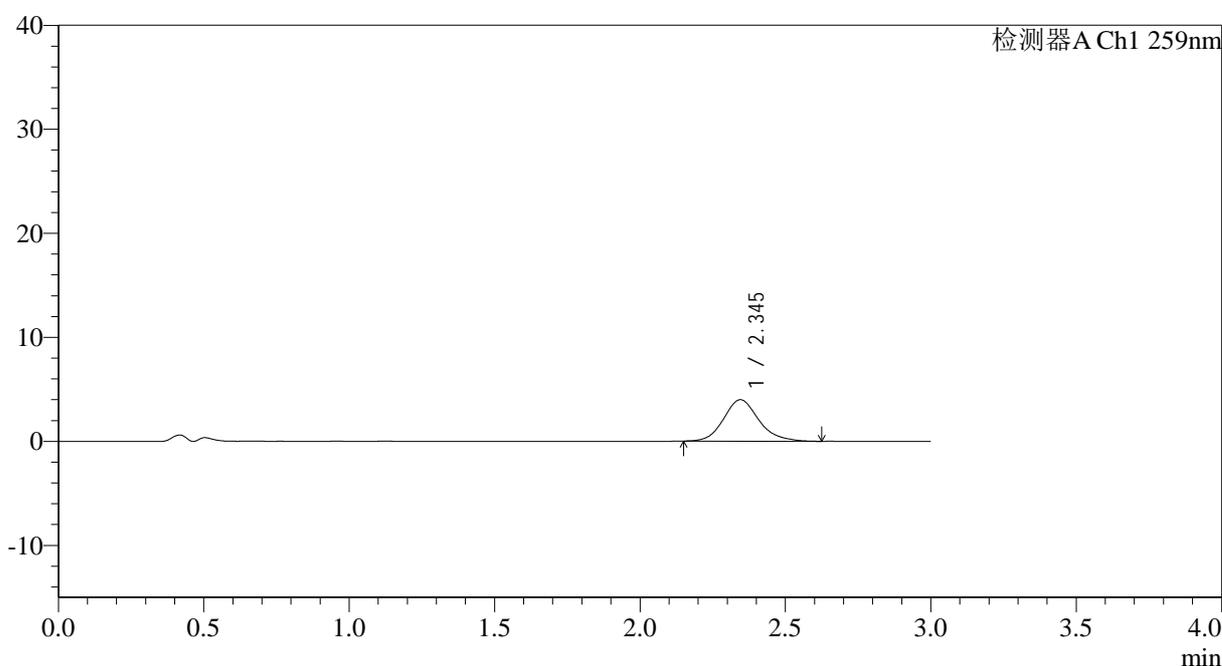

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	33644	100.000	3987	1883	1.158	--
总计		33644	100.000	3987			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1478-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 21:57:24 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:23:49 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

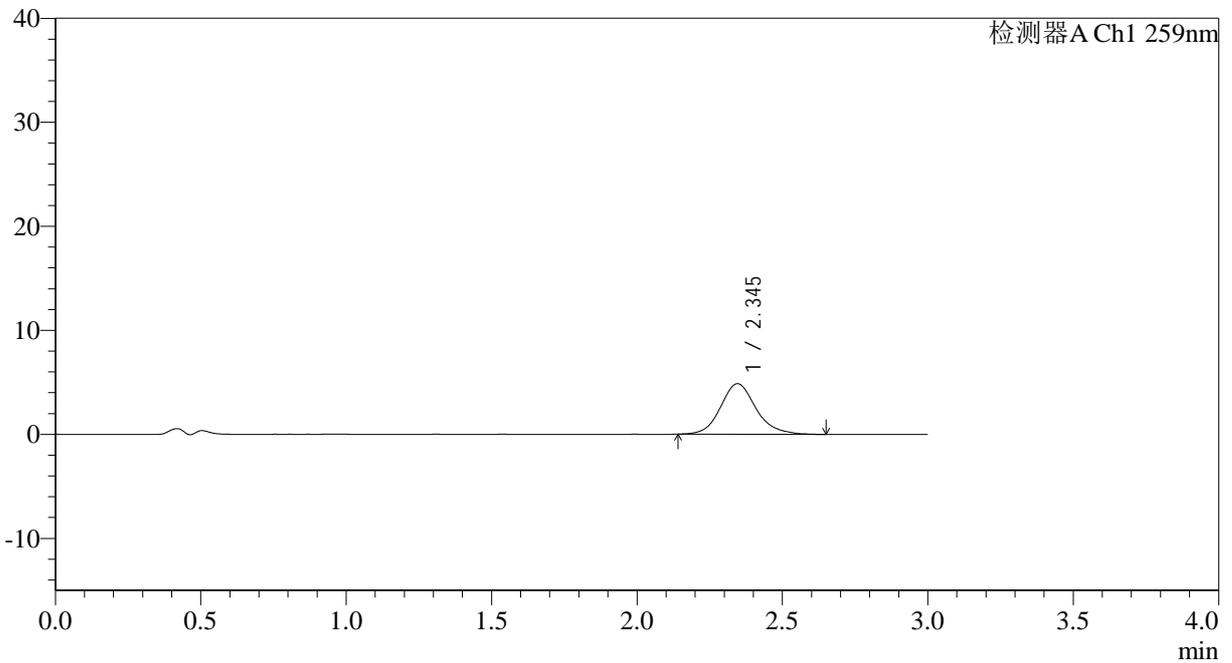

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	41346	100.000	4865	1873	1.147	--
总计		41346	100.000	4865			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1480-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 22:04:12 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:23:55 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

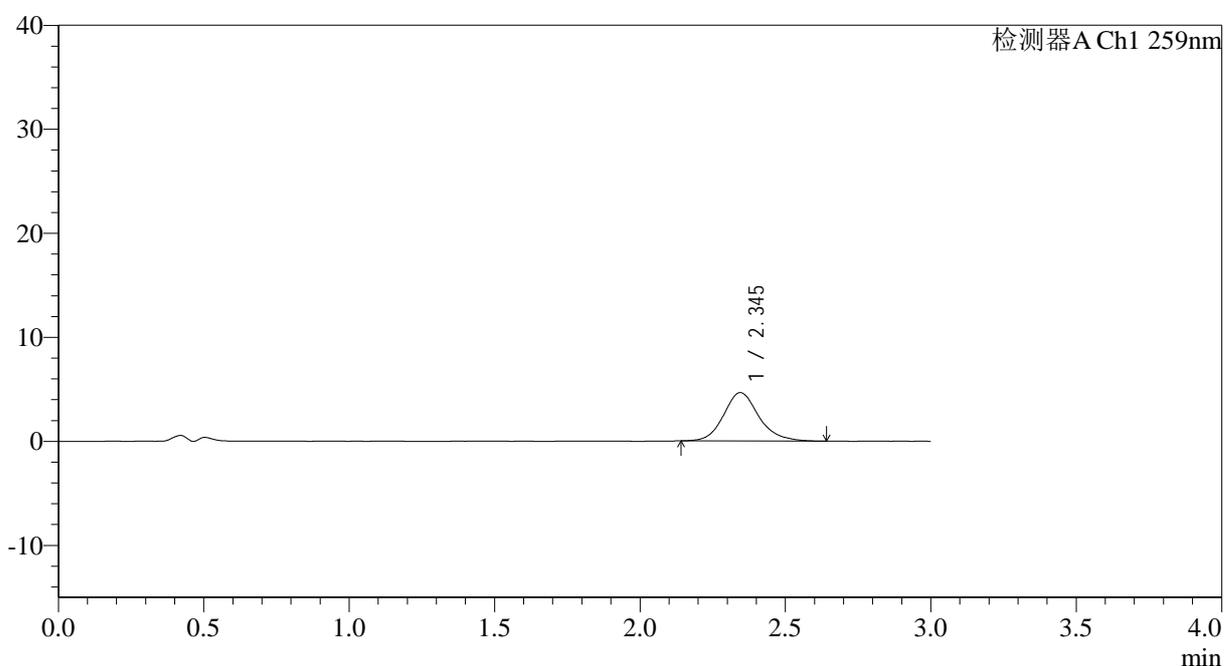

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	39480	100.000	4656	1889	1.164	--
总计		39480	100.000	4656			

图21 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1481-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 22:07:36 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:23:57 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

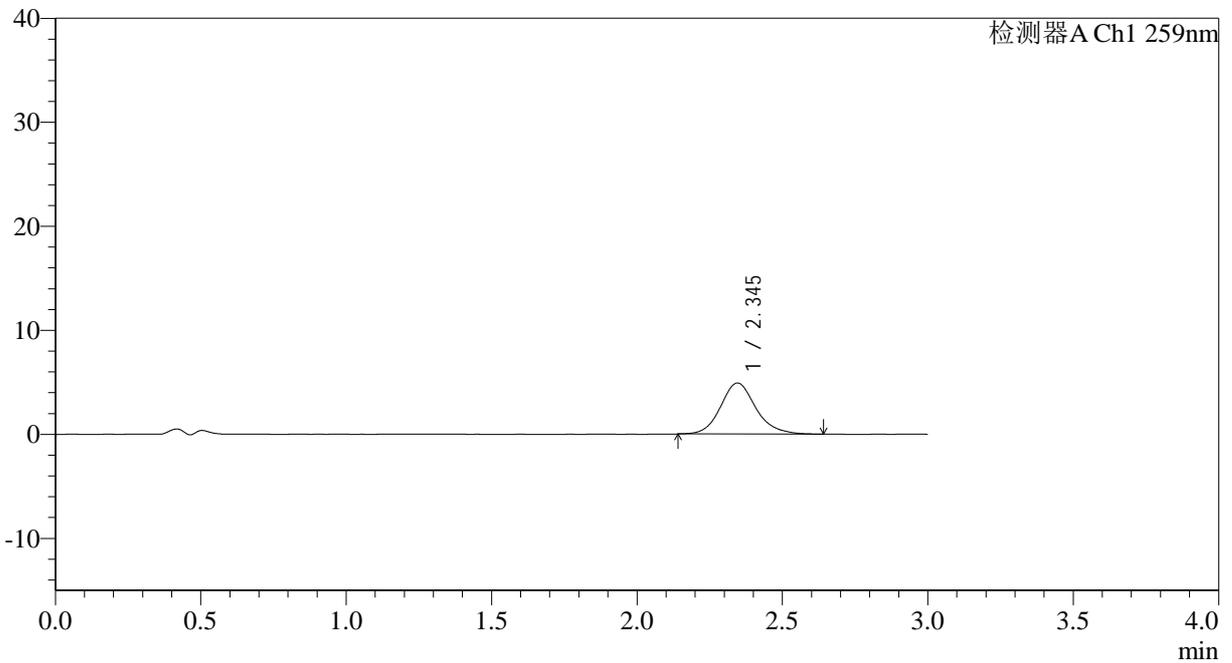

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	41538	100.000	4912	1889	1.151	--
总计		41538	100.000	4912			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1482-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 22:11:00 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:24:00 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

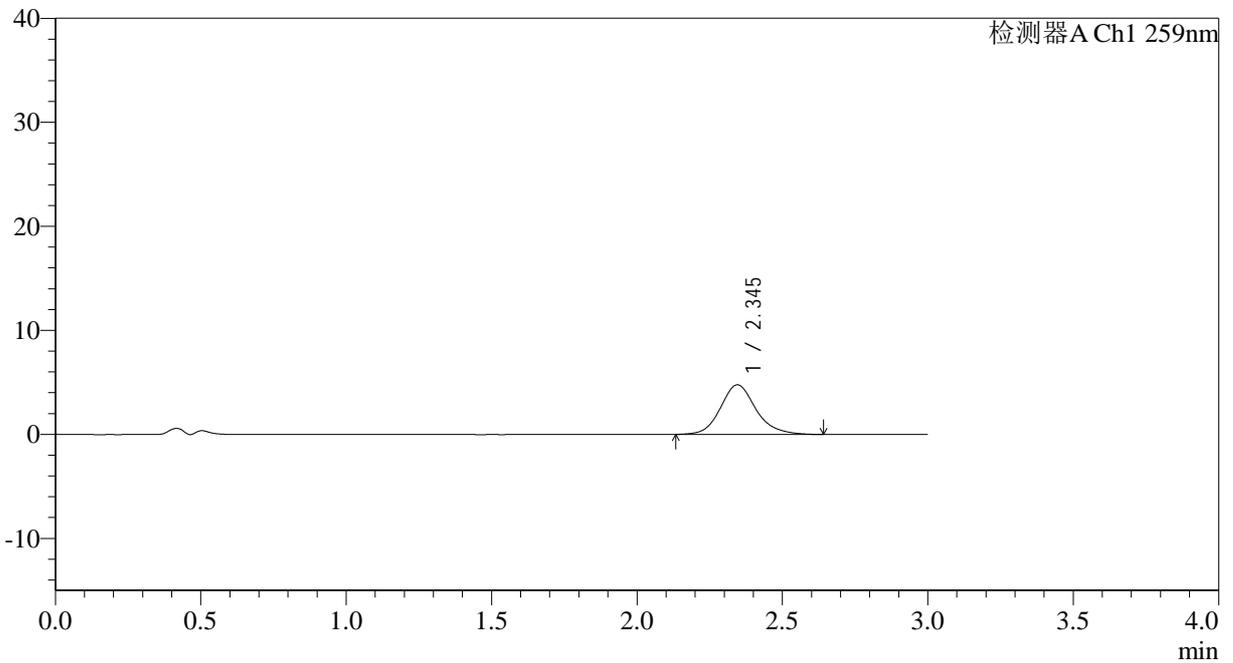

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	40564	100.000	4767	1873	1.151	--
总计		40564	100.000	4767			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1483-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 22:14:24 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:24:03 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

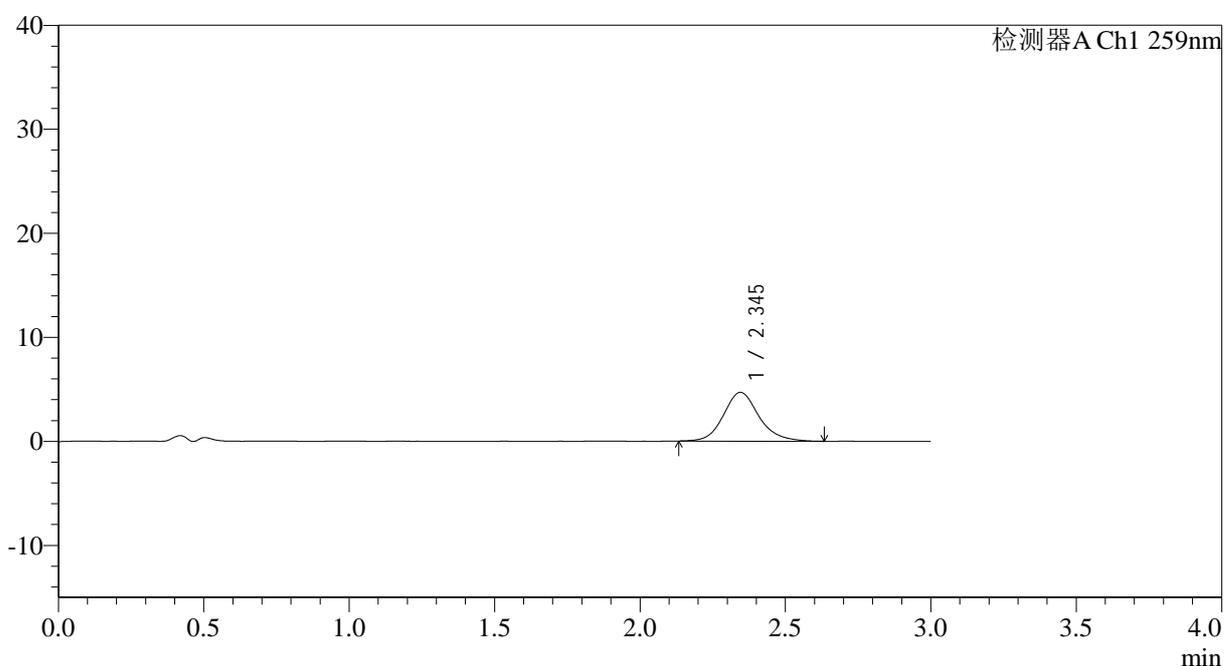

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	39861	100.000	4690	1886	1.144	--
总计		39861	100.000	4690			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1484-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 22:17:48 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:24:06 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

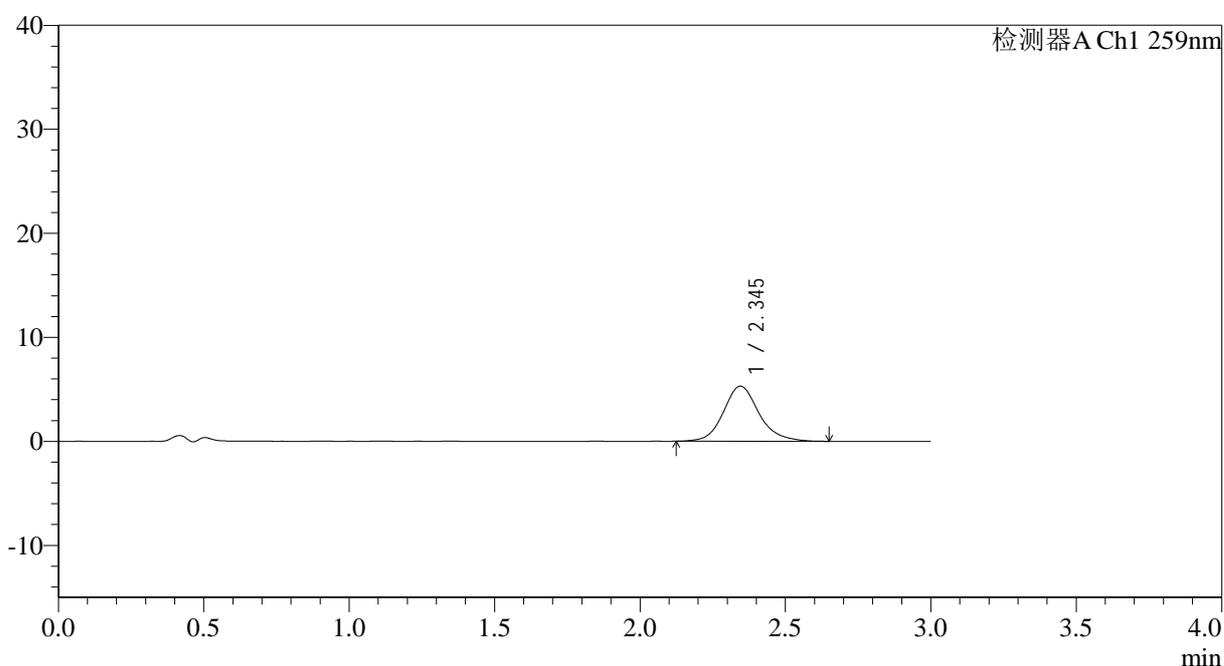

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	45205	100.000	5300	1880	1.151	--
总计		45205	100.000	5300			

图25 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1486-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 22:24:36 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:24:12 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

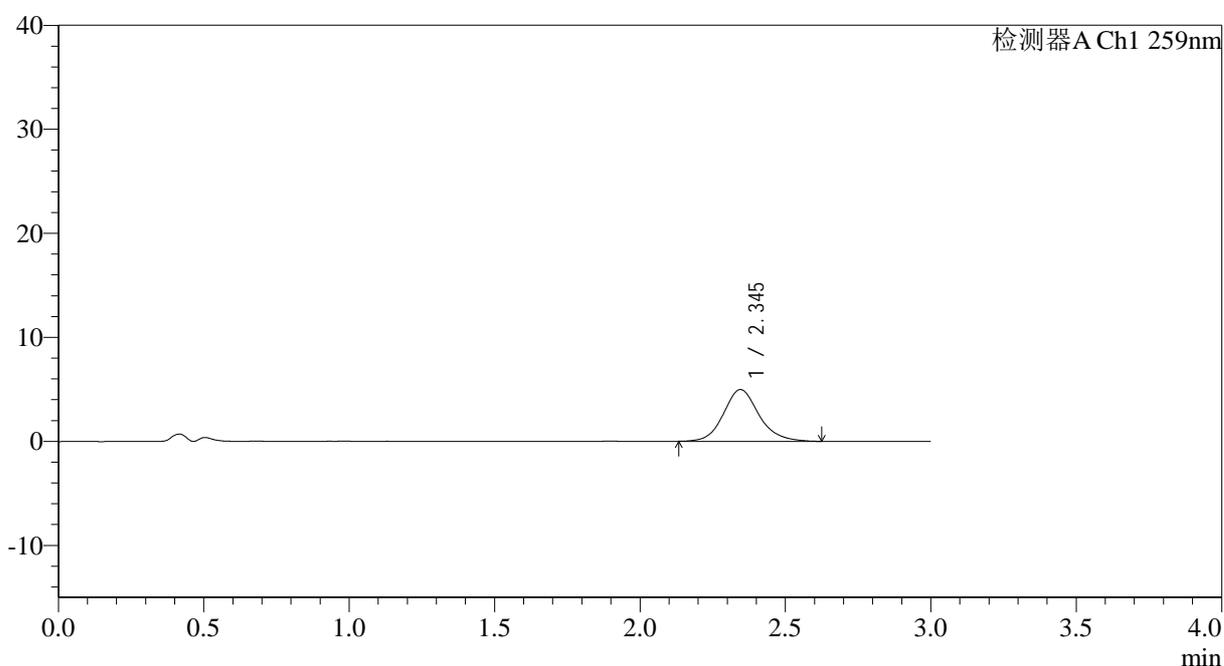

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	42279	100.000	4973	1860	1.138	--
总计		42279	100.000	4973			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1489-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 22:34:48 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:24:21 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

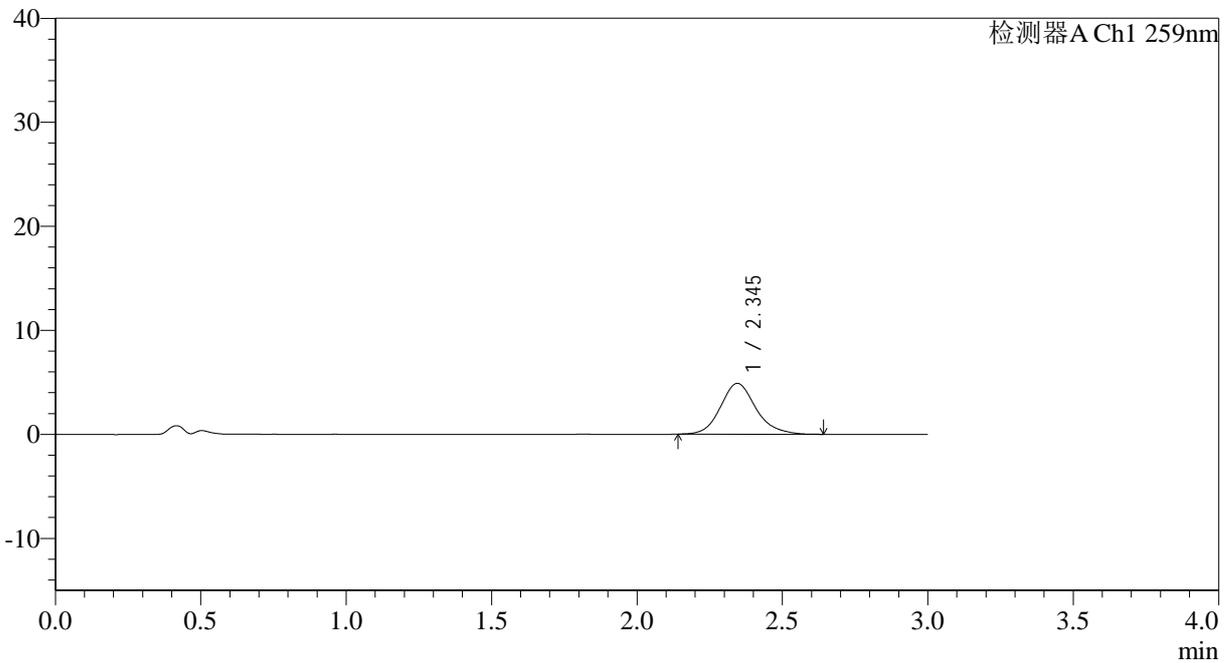

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	41437	100.000	4890	1876	1.154	--
总计		41437	100.000	4890			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1490-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 22:38:13 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:24:24 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

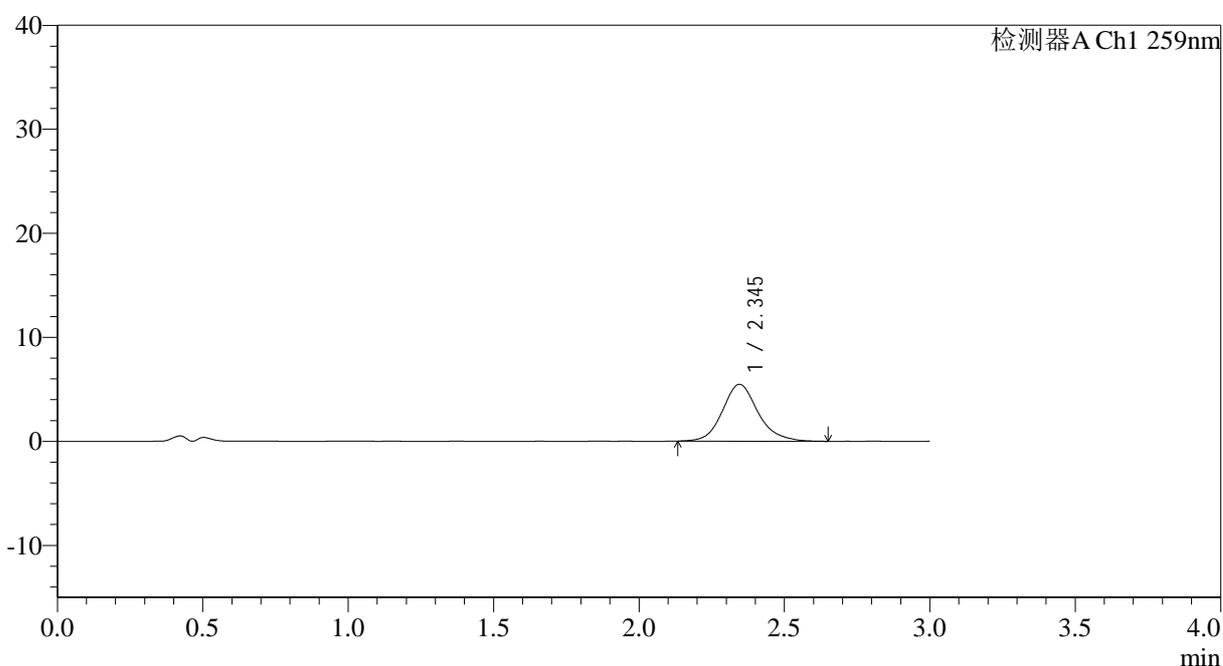

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	46552	100.000	5463	1850	1.151	--
总计		46552	100.000	5463			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1491-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 22:41:38 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:24:27 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

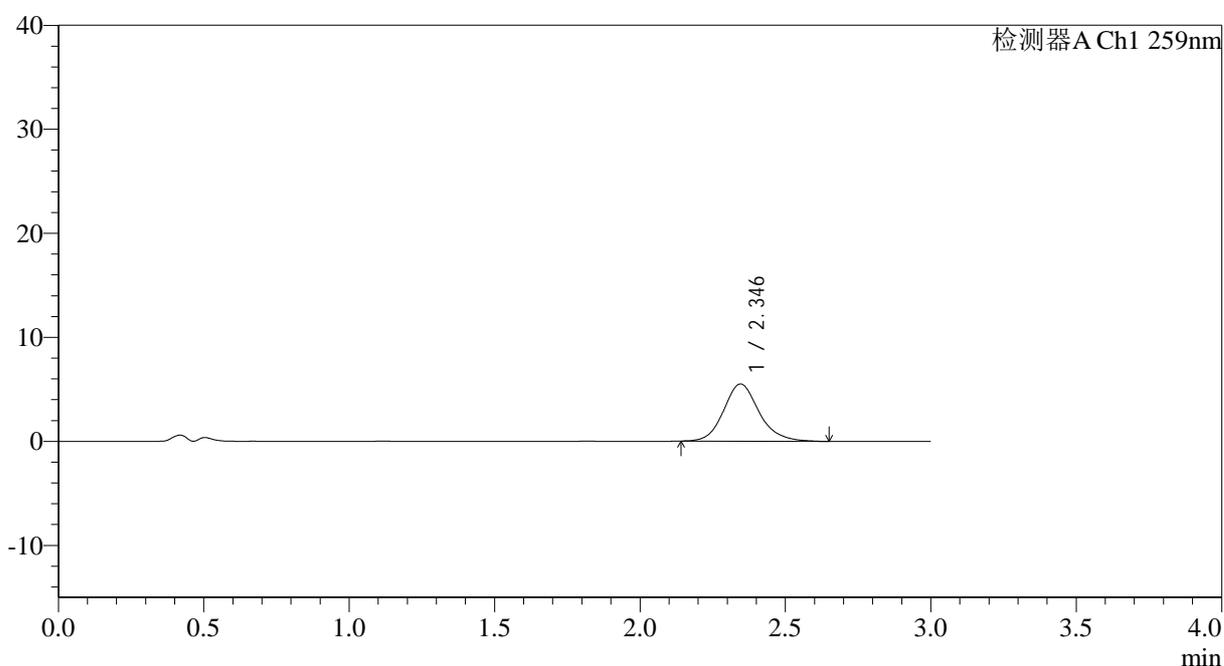

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	46698	100.000	5501	1859	1.148	--
总计		46698	100.000	5501			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1493-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 22:48:27 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:24:33 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

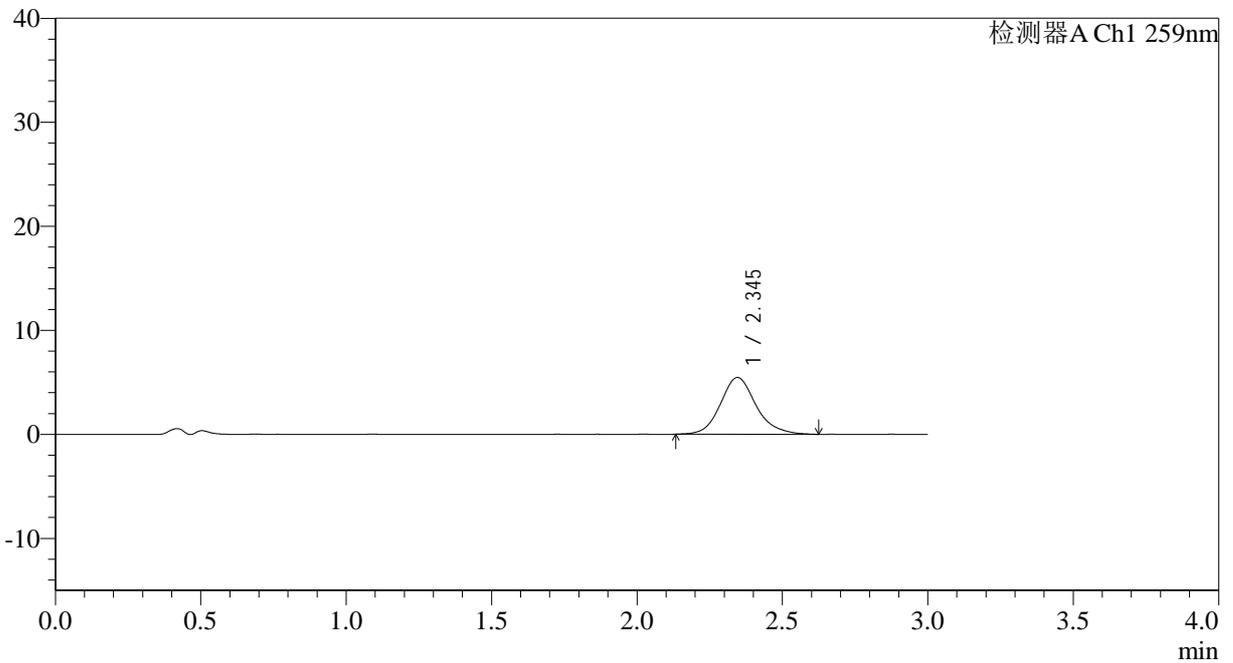

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	46517	100.000	5459	1853	1.149	--
总计		46517	100.000	5459			

图34 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1494-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 22:51:51 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:24:36 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

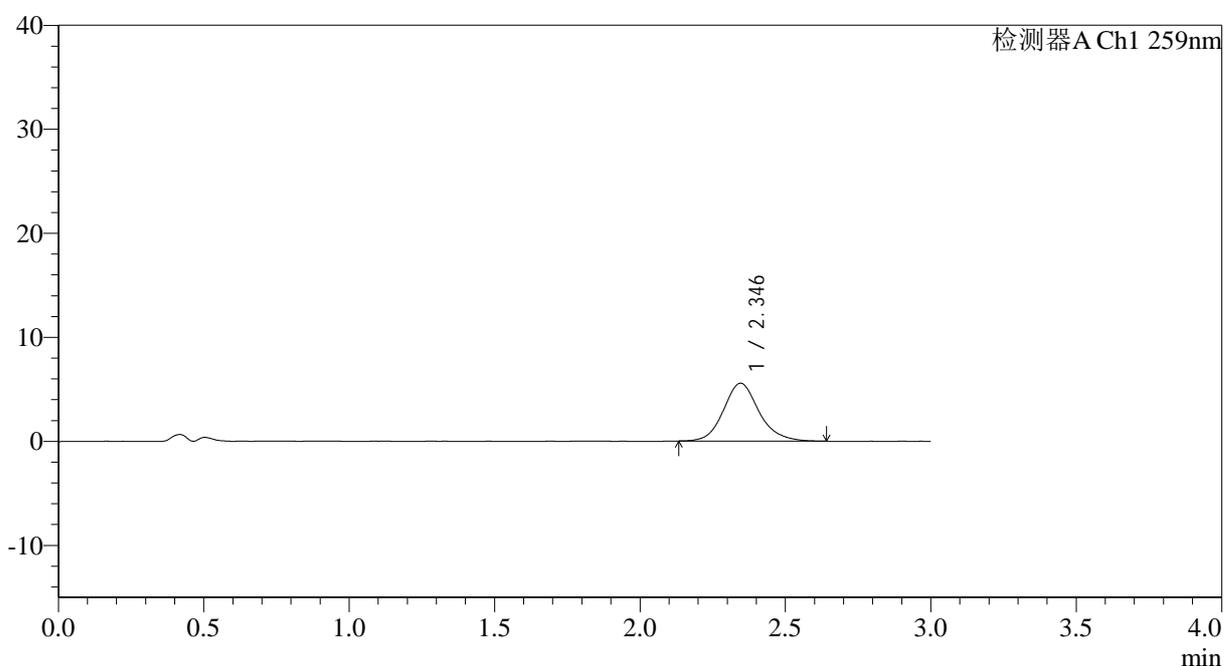

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	47393	100.000	5566	1874	1.143	--
总计		47393	100.000	5566			

图35 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1495-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 22:55:15 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:24:38 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

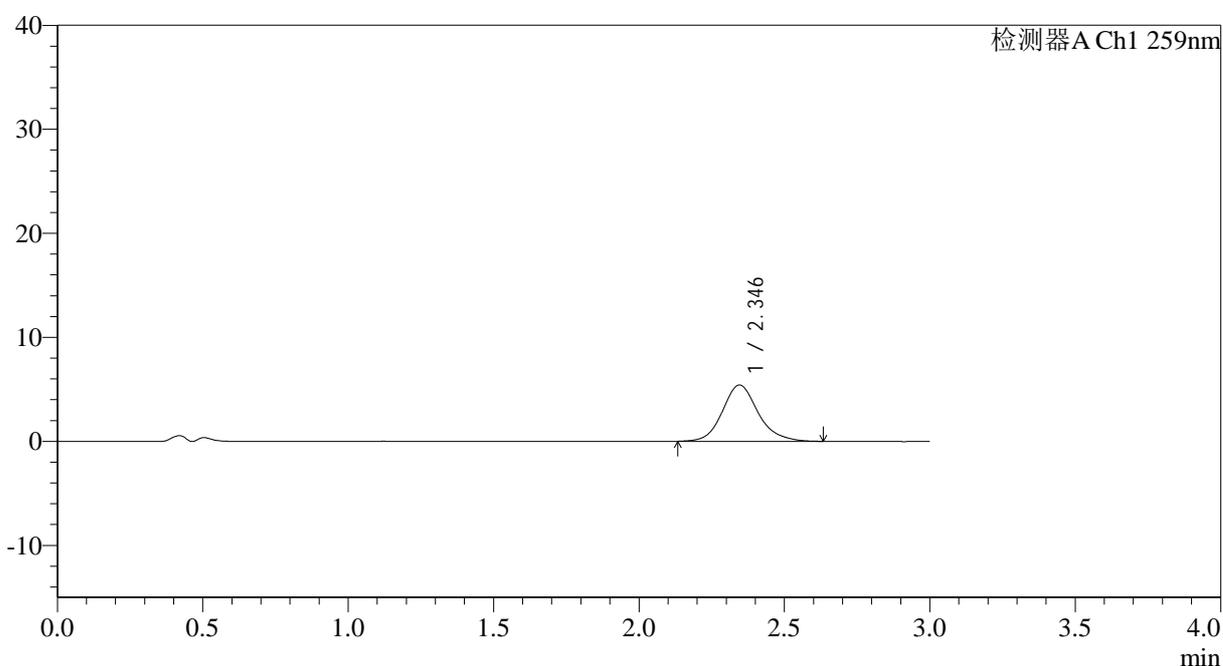

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	46380	100.000	5417	1845	1.149	--
总计		46380	100.000	5417			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1497-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 23:02:04 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:24:44 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

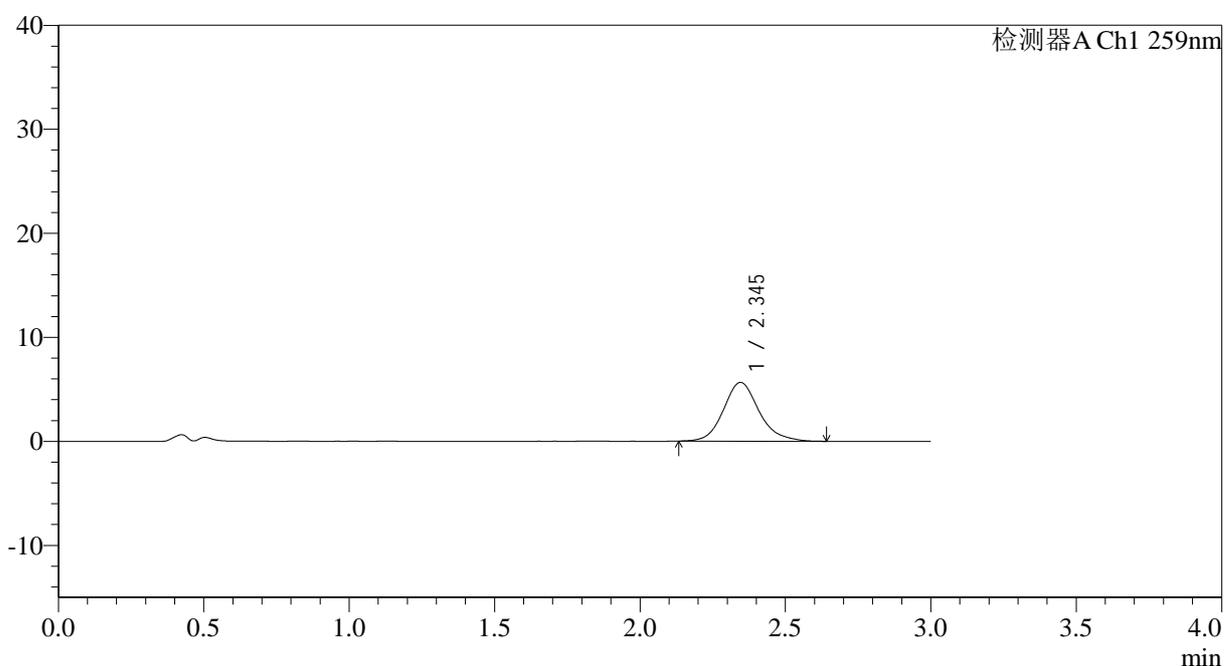

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	48263	100.000	5653	1848	1.156	--
总计		48263	100.000	5653			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1498-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 23:05:29 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:24:47 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

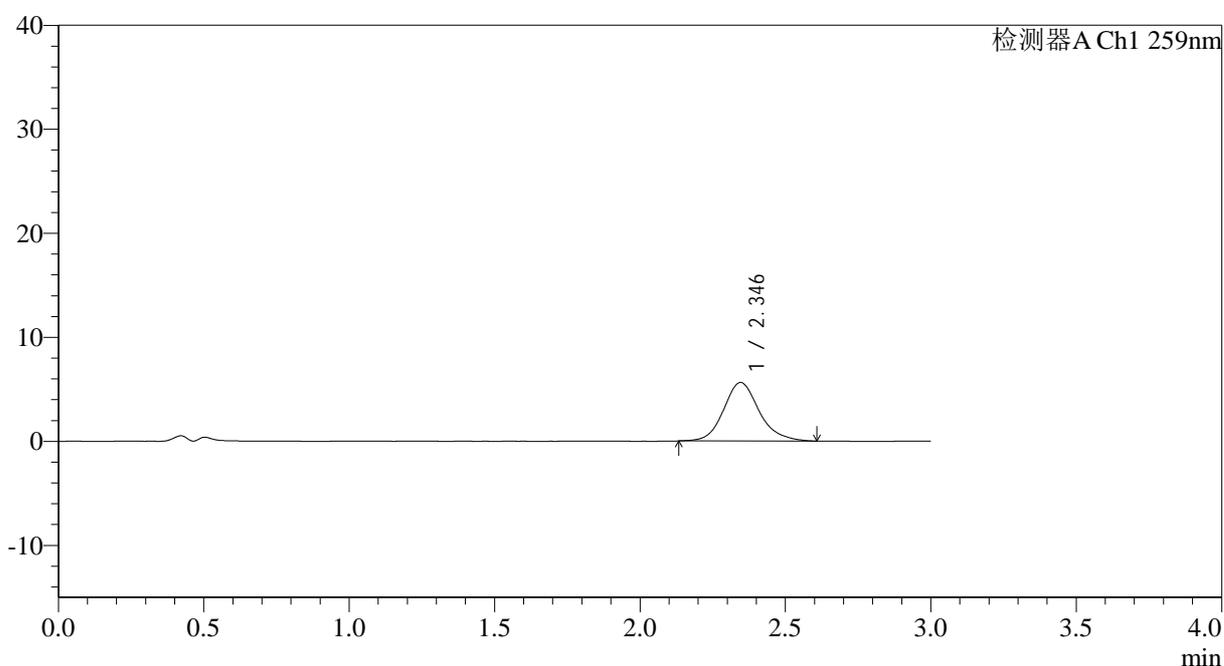

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	47861	100.000	5623	1864	1.153	--
总计		47861	100.000	5623			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1500-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 23:12:17 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:24:52 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

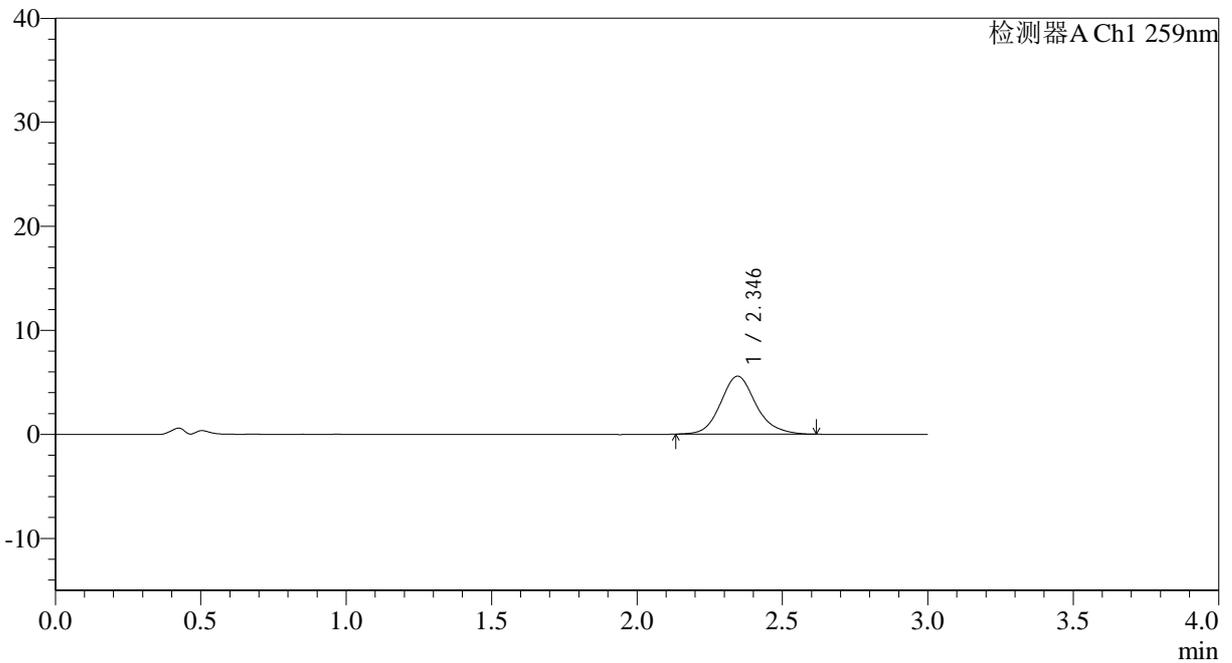

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	47355	100.000	5581	1863	1.144	--
总计		47355	100.000	5581			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1503-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 23:22:31 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:25:01 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

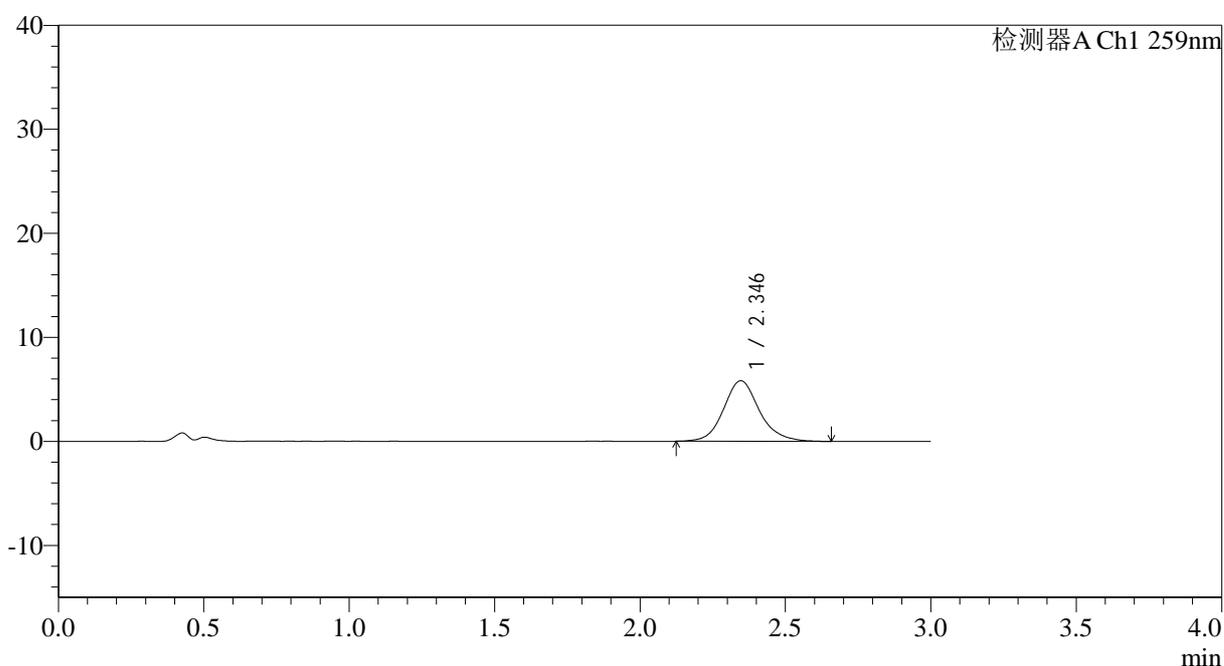

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	50049	100.000	5834	1849	1.137	--
总计		50049	100.000	5834			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1504-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 23:25:56 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:25:04 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

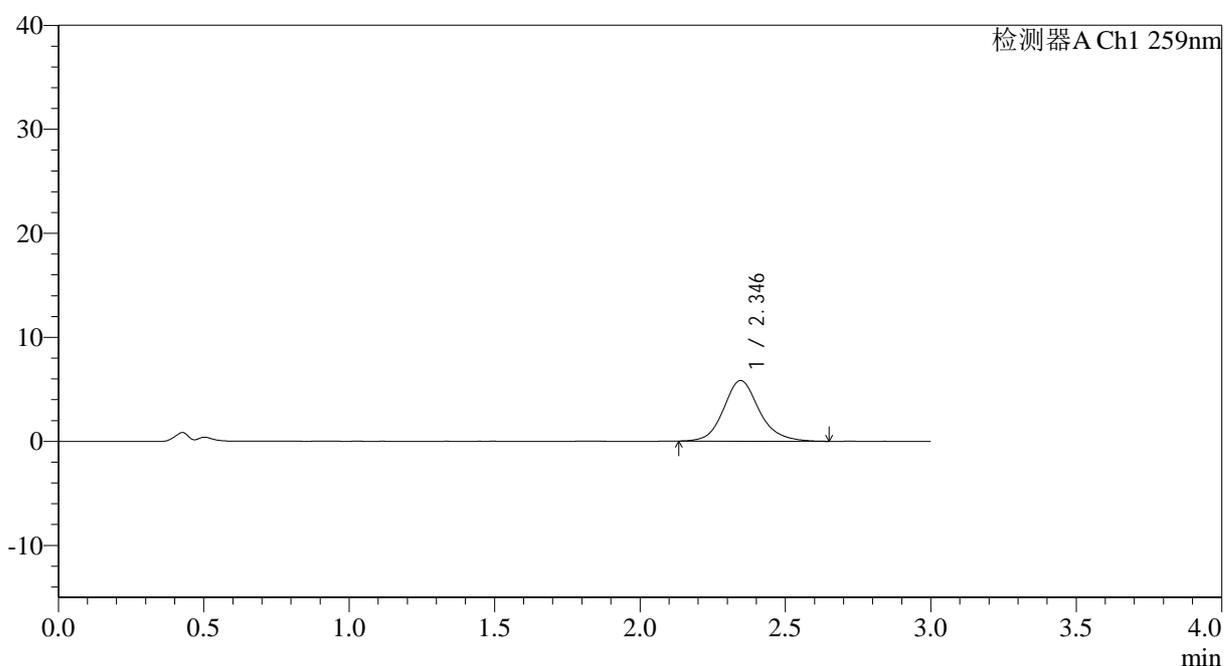

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	49657	100.000	5832	1875	1.146	--
总计		49657	100.000	5832			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1505-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 23:29:20 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:25:07 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

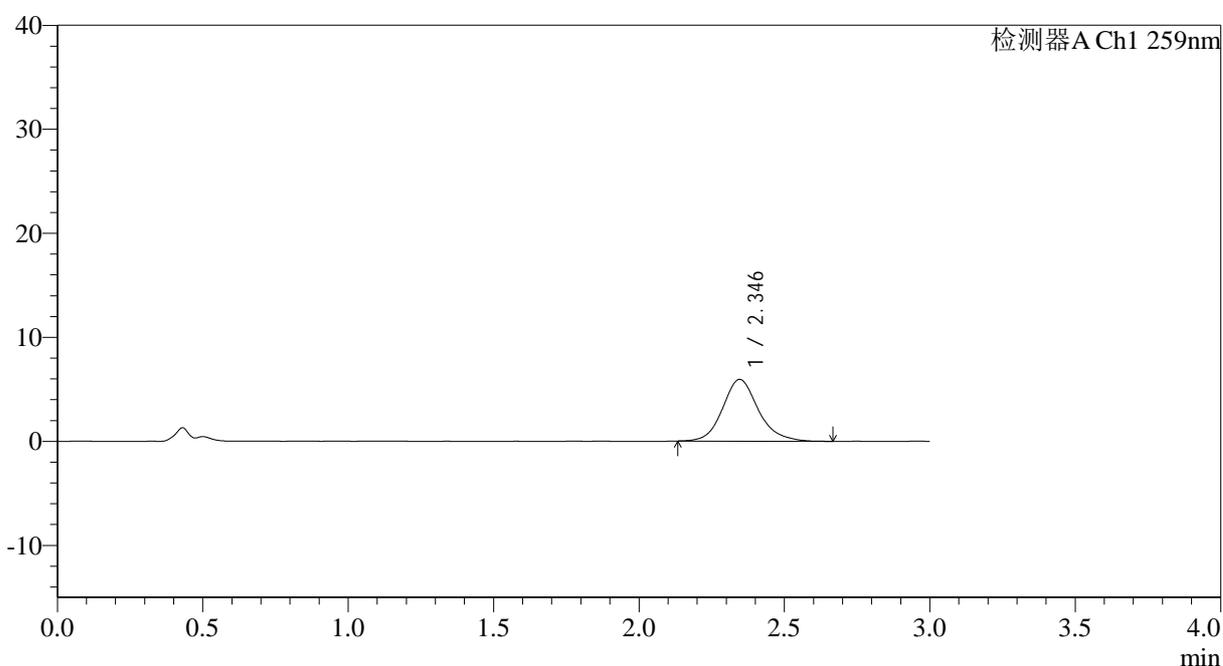

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	50797	100.000	5939	1846	1.157	--
总计		50797	100.000	5939			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1506-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 23:32:44 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:25:10 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

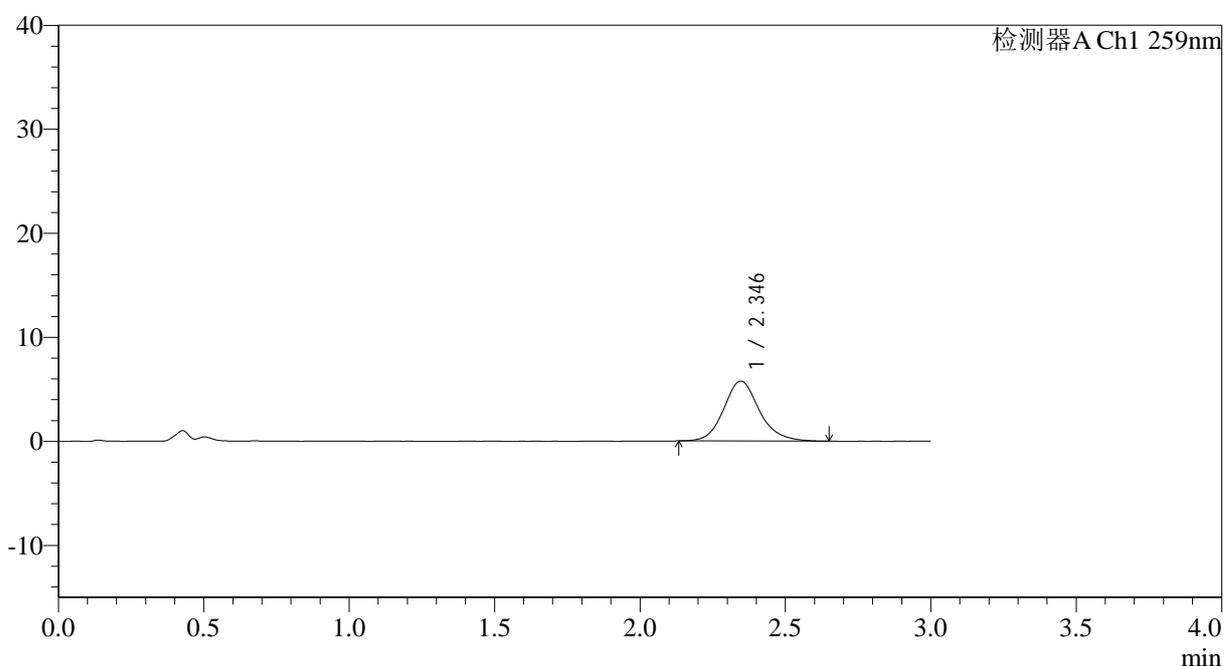

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	49144	100.000	5767	1860	1.146	--
总计		49144	100.000	5767			

图47 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1508-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-8
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 23:39:34 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:25:16 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

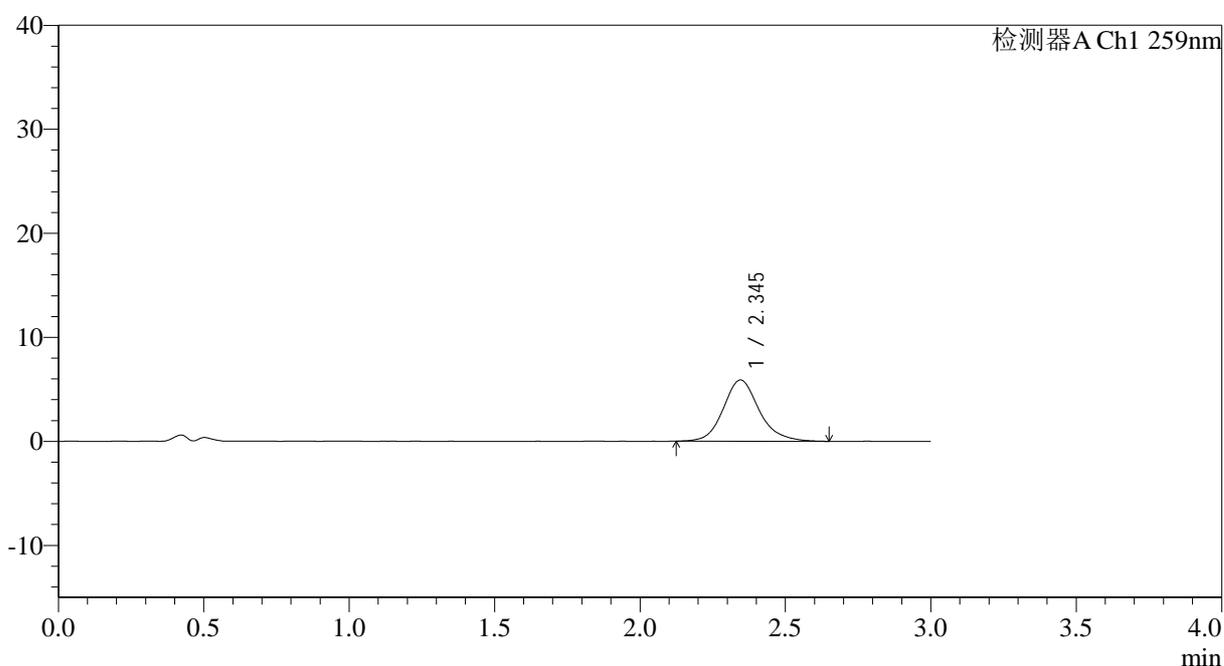

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	50558	100.000	5891	1838	1.155	--
总计		50558	100.000	5891			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1509-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-17
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 23:42:59 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:25:18 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

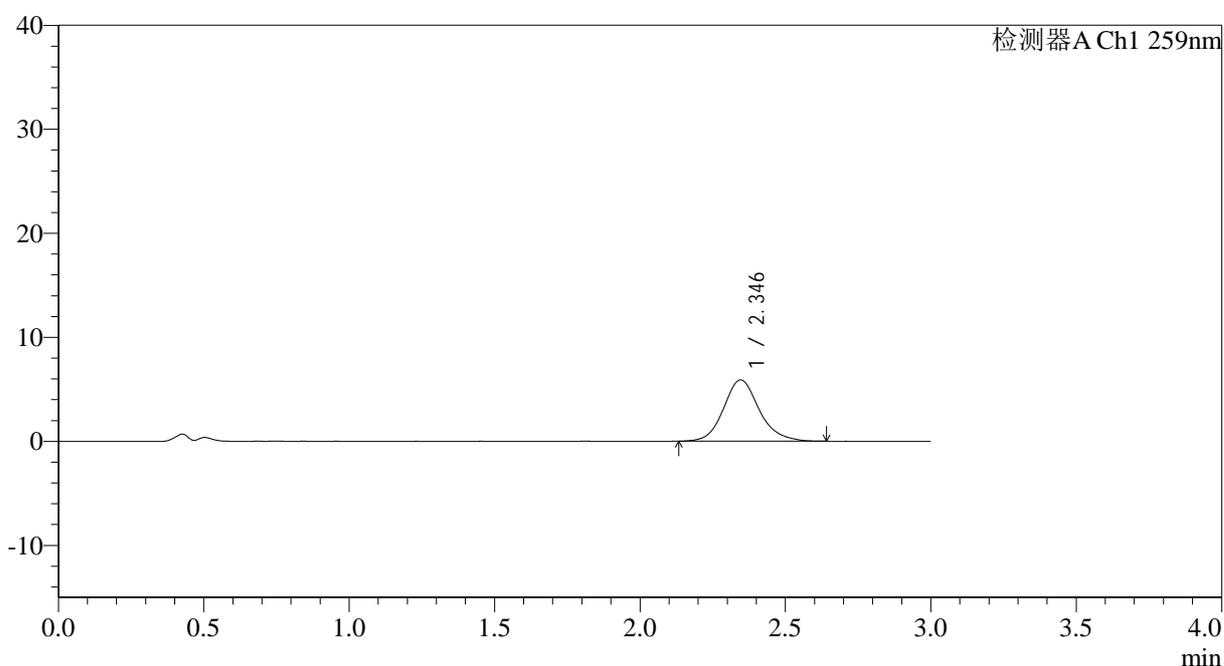

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	50363	100.000	5894	1854	1.151	--
总计		50363	100.000	5894			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1510-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p3-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 23:46:24 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:25:21 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

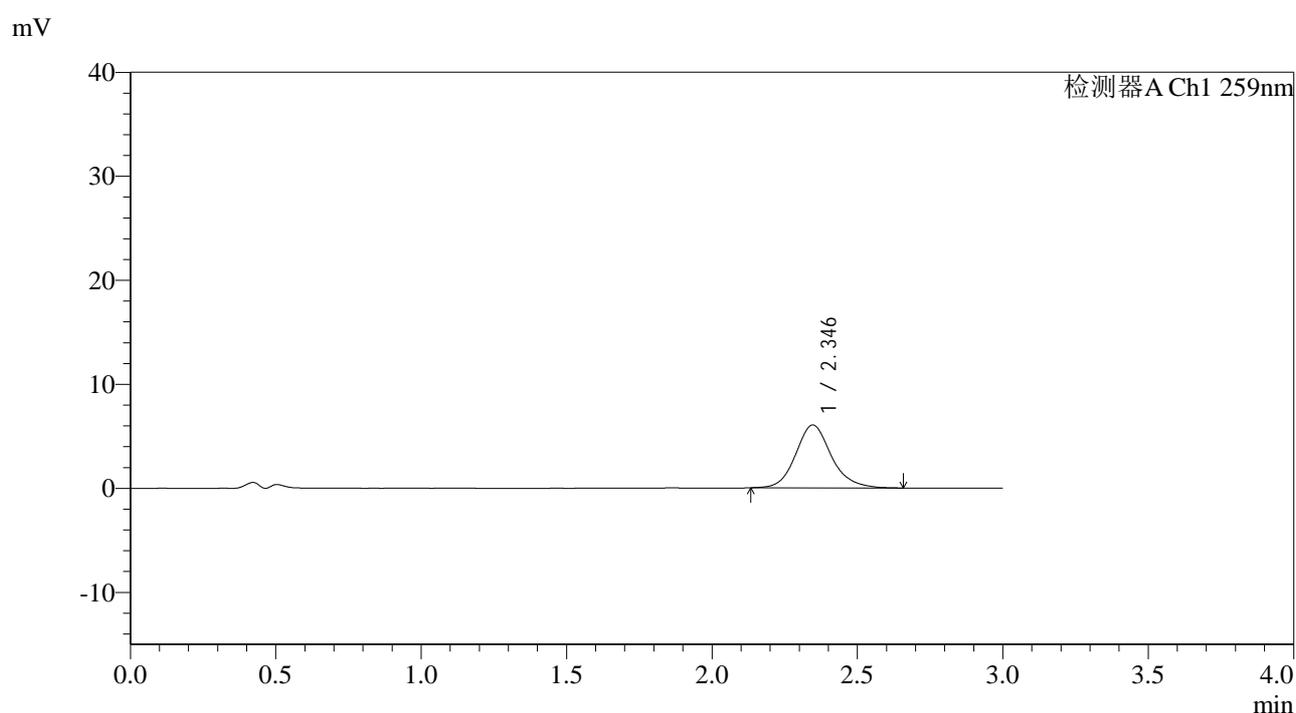

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	51760	100.000	6052	1842	1.147	--
总计		51760	100.000	6052			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1511-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 23:49:49 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:25:24 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

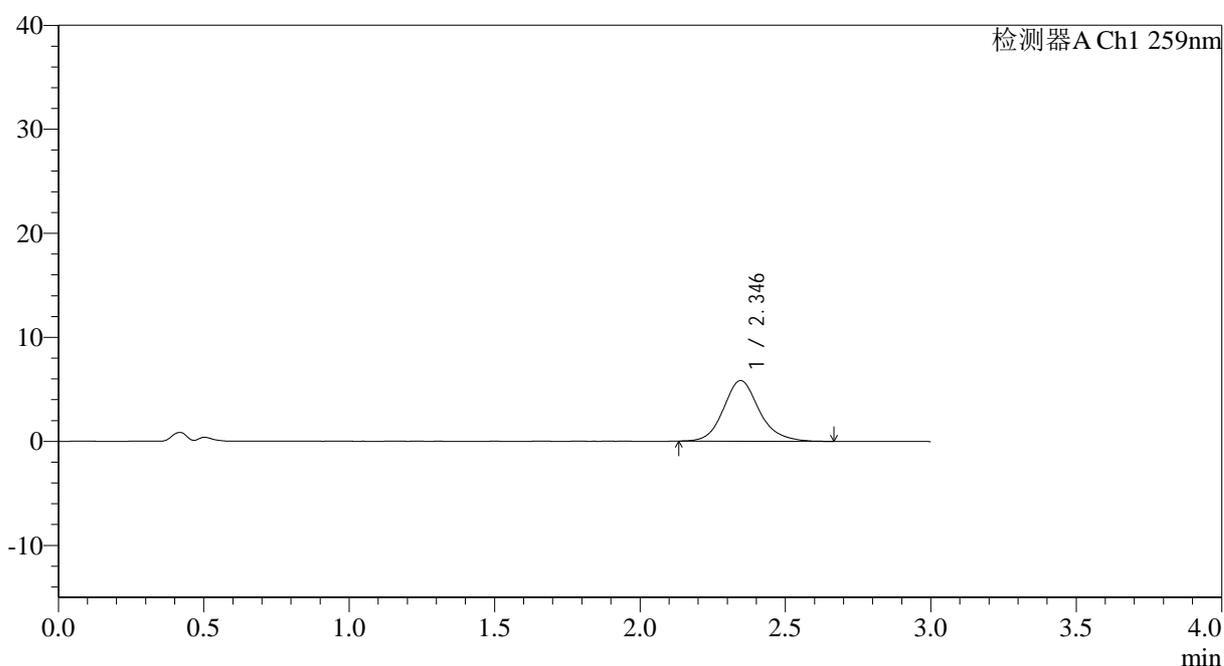

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	49928	100.000	5833	1850	1.156	--
总计		49928	100.000	5833			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1512-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-44
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/01 23:53:13 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:25:27 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

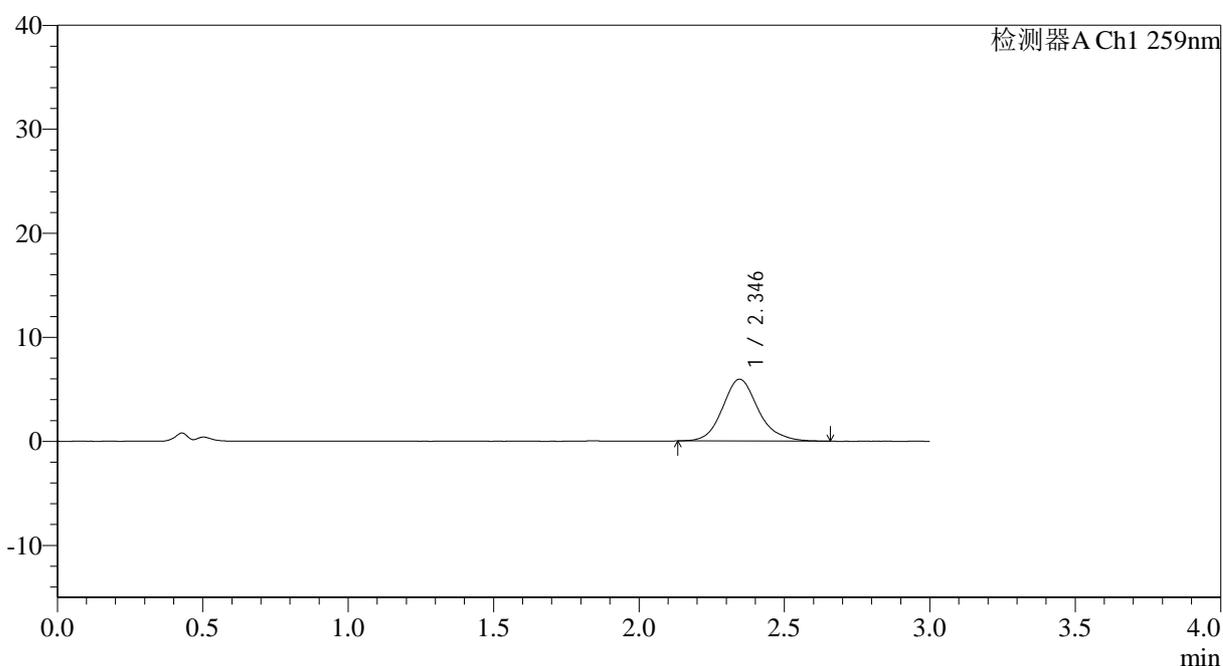

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	50921	100.000	5954	1847	1.152	--
总计		50921	100.000	5954			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1514-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 00:00:00 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:25:32 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

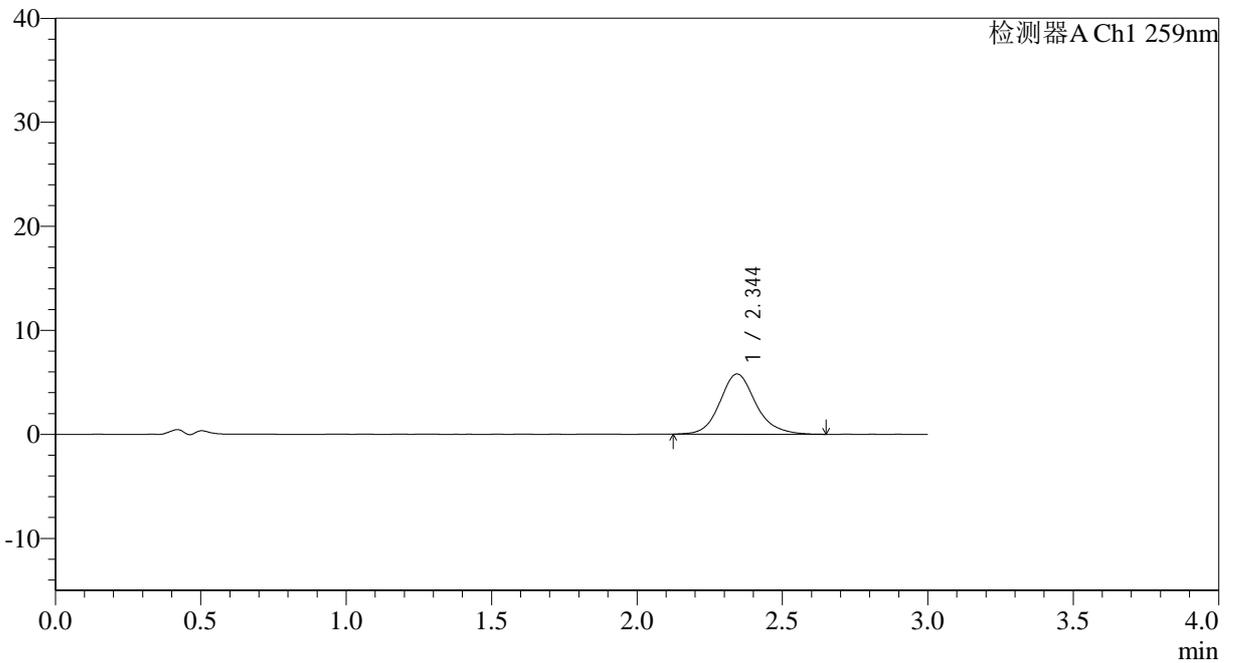

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.344	49903	100.000	5786	1832	1.149	--
总计		49903	100.000	5786			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1515-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 00:03:24 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:25:35 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

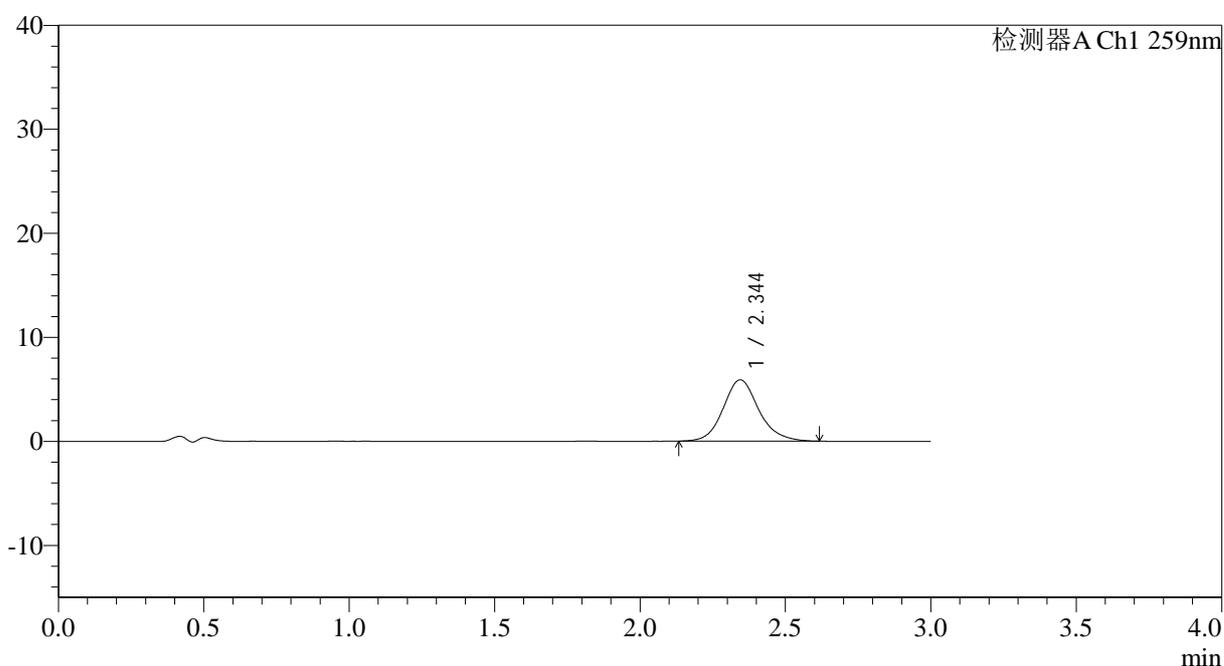

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.344	50398	100.000	5902	1856	1.142	--
总计		50398	100.000	5902			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1517-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 00:10:10 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:25:41 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

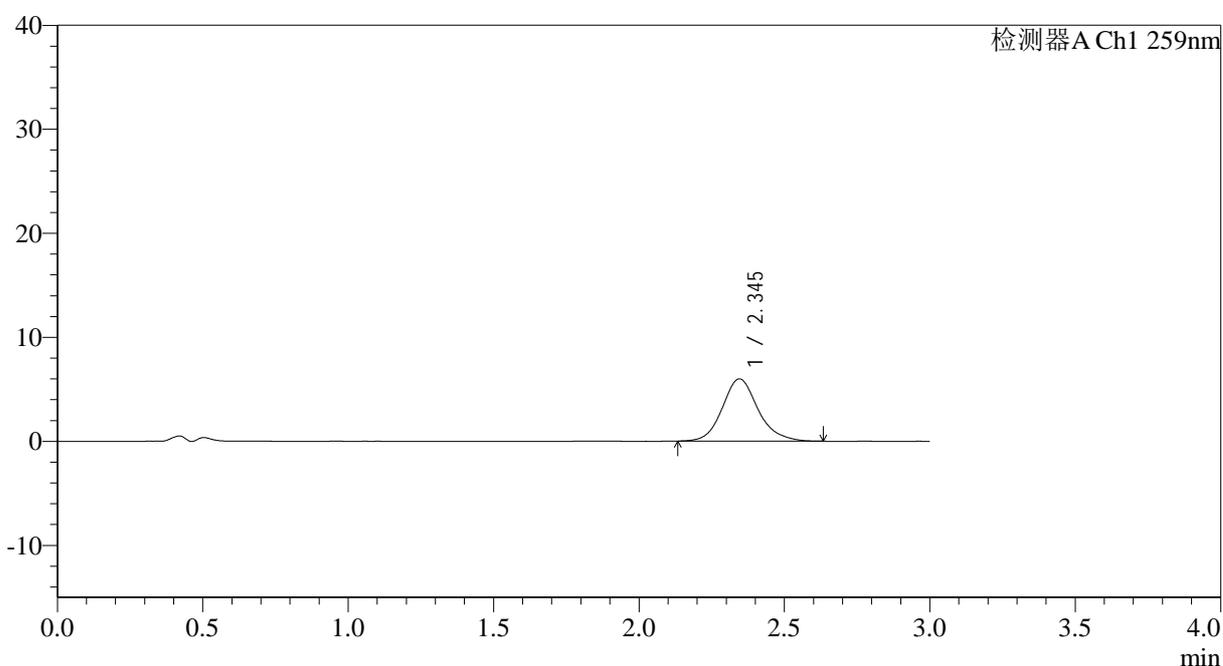

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	51095	100.000	5983	1853	1.147	--
总计		51095	100.000	5983			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1518-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 00:13:33 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:25:44 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

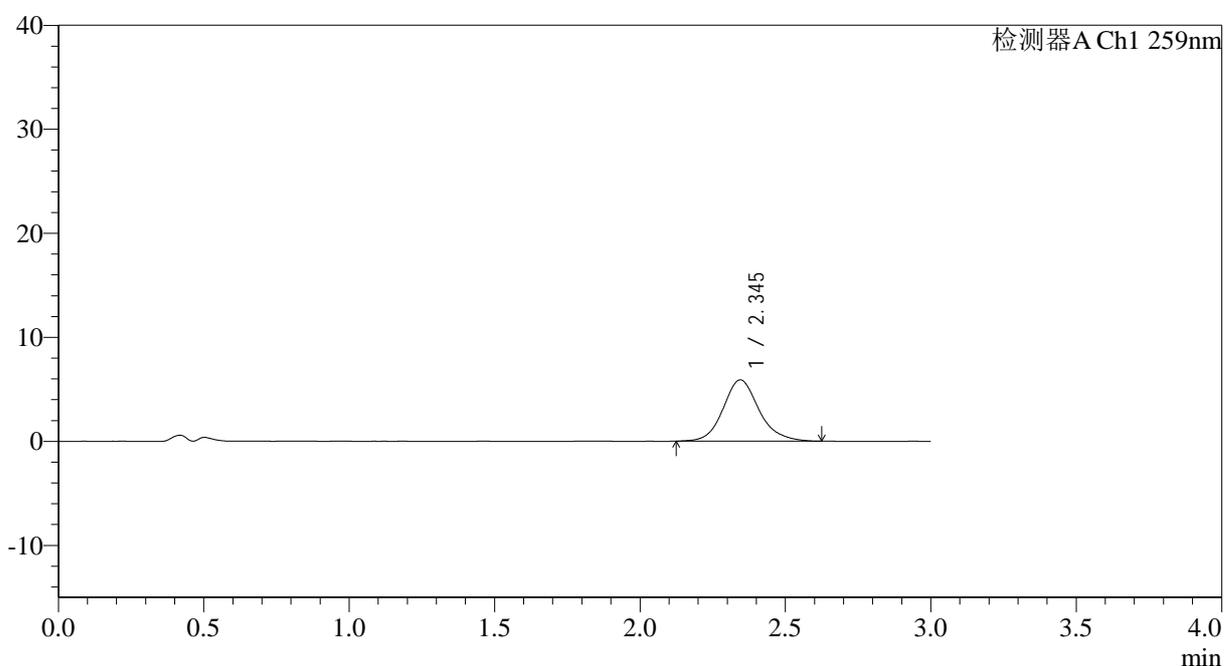

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	50701	100.000	5899	1822	1.141	--
总计		50701	100.000	5899			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1519-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p6-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 00:16:56 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:25:47 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

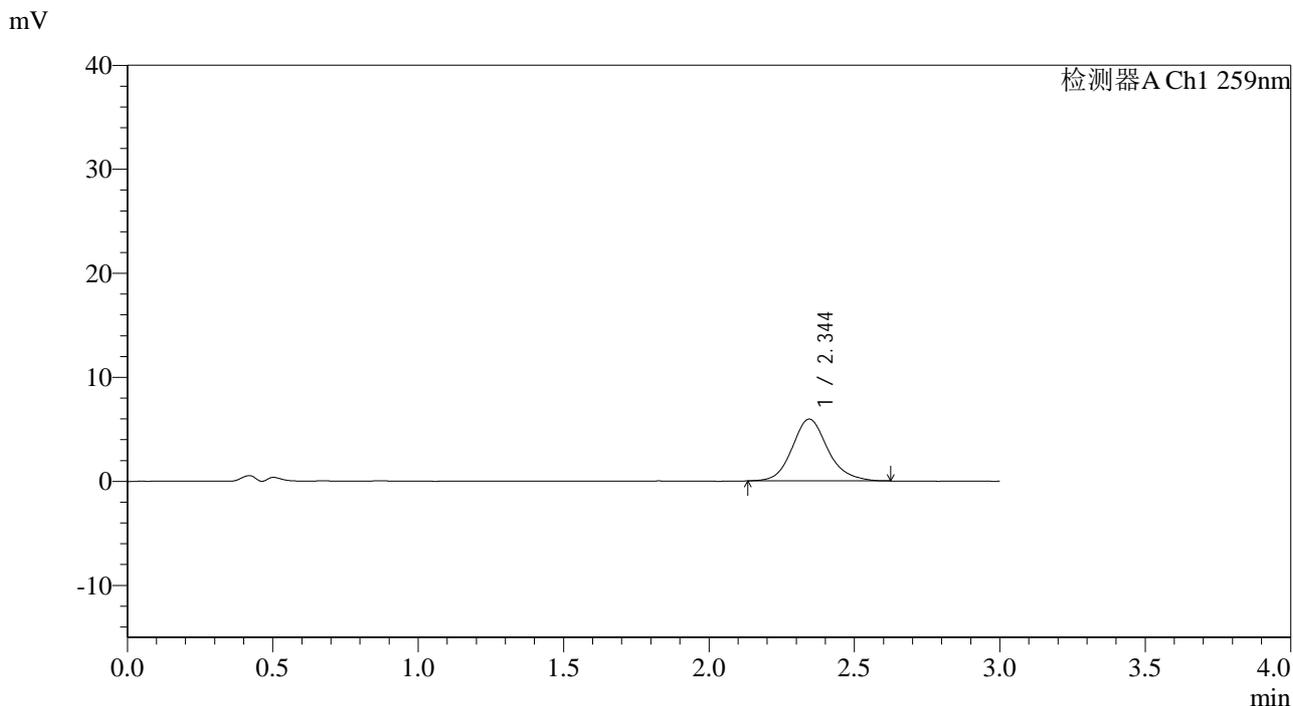

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.344	50748	100.000	5940	1847	1.149	--
总计		50748	100.000	5940			

图60 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1520-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 00:20:20 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:25:50 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

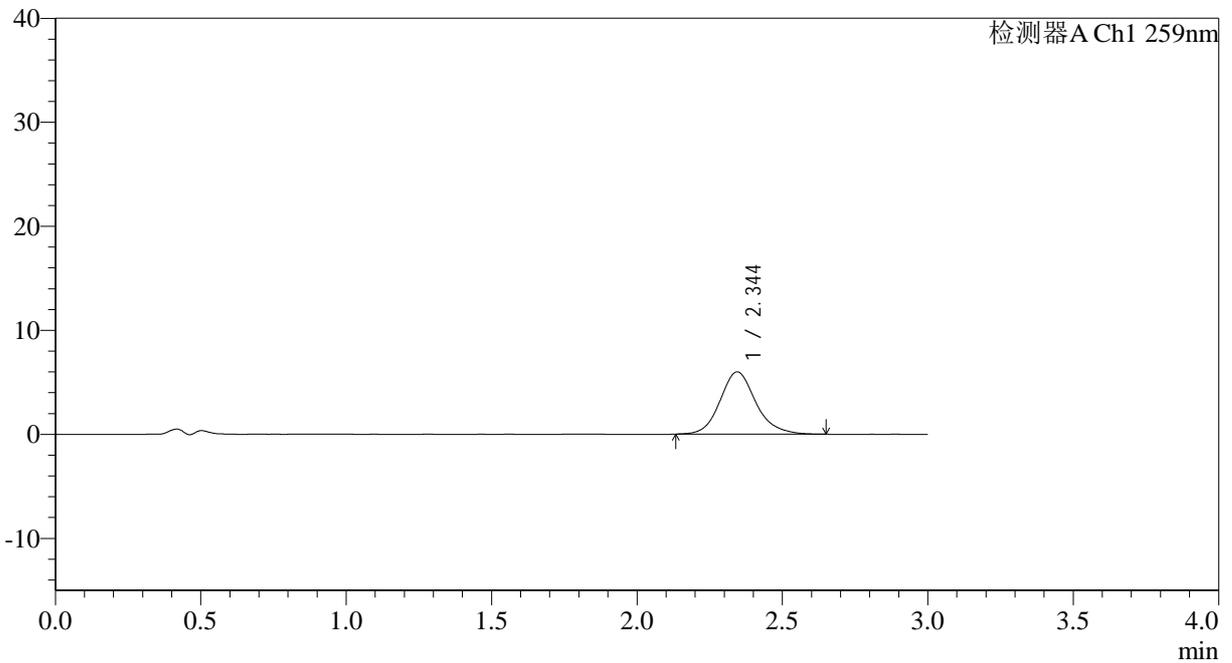

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.344	51395	100.000	5990	1829	1.149	--
总计		51395	100.000	5990			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1521-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 00:23:44 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:25:52 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

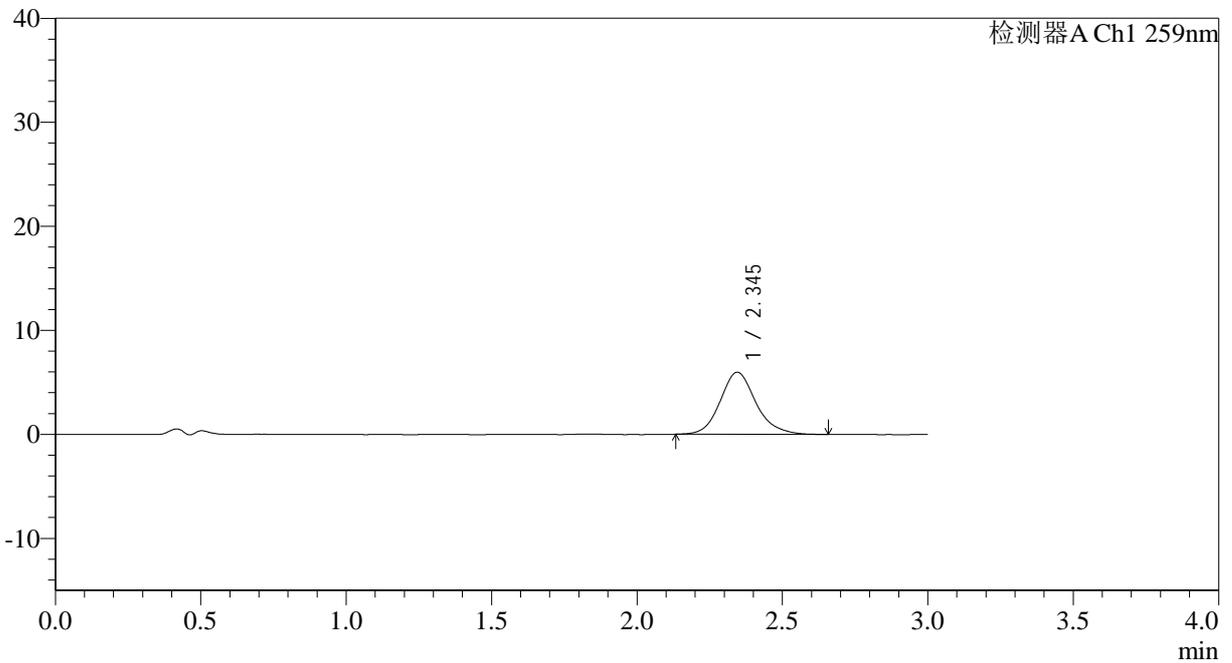

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	51223	100.000	5971	1833	1.147	--
总计		51223	100.000	5971			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1522-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 00:27:06 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:25:55 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

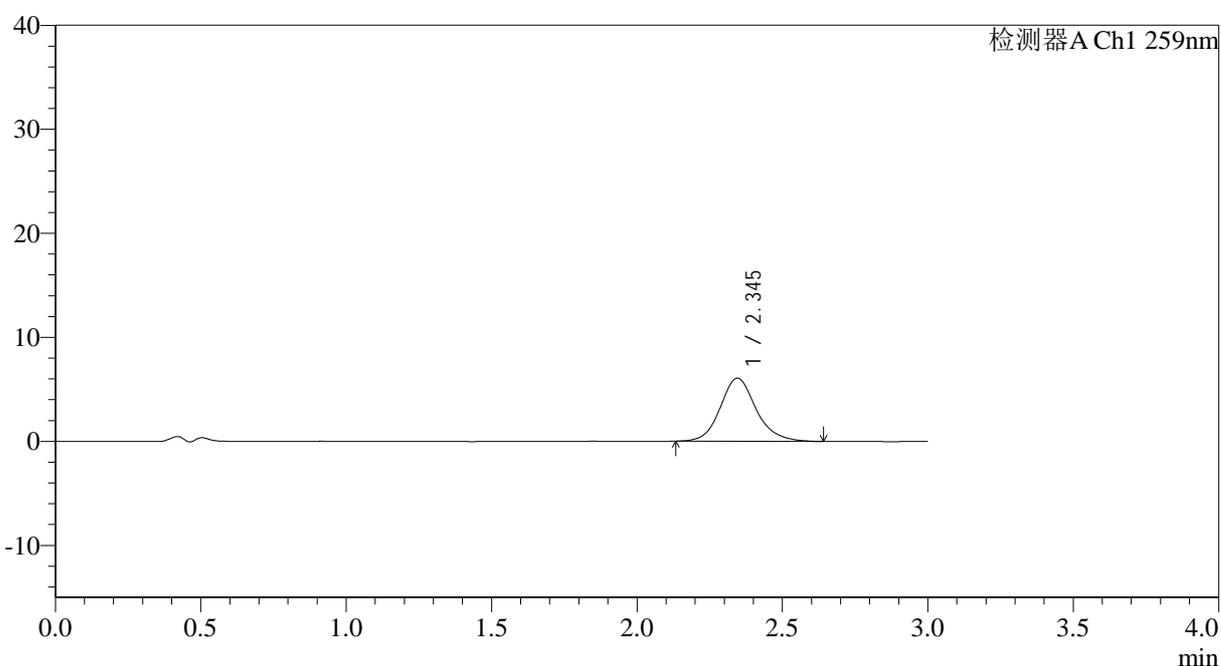

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	52127	100.000	6069	1836	1.139	--
总计		52127	100.000	6069			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1523-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 00:30:30 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:25:58 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

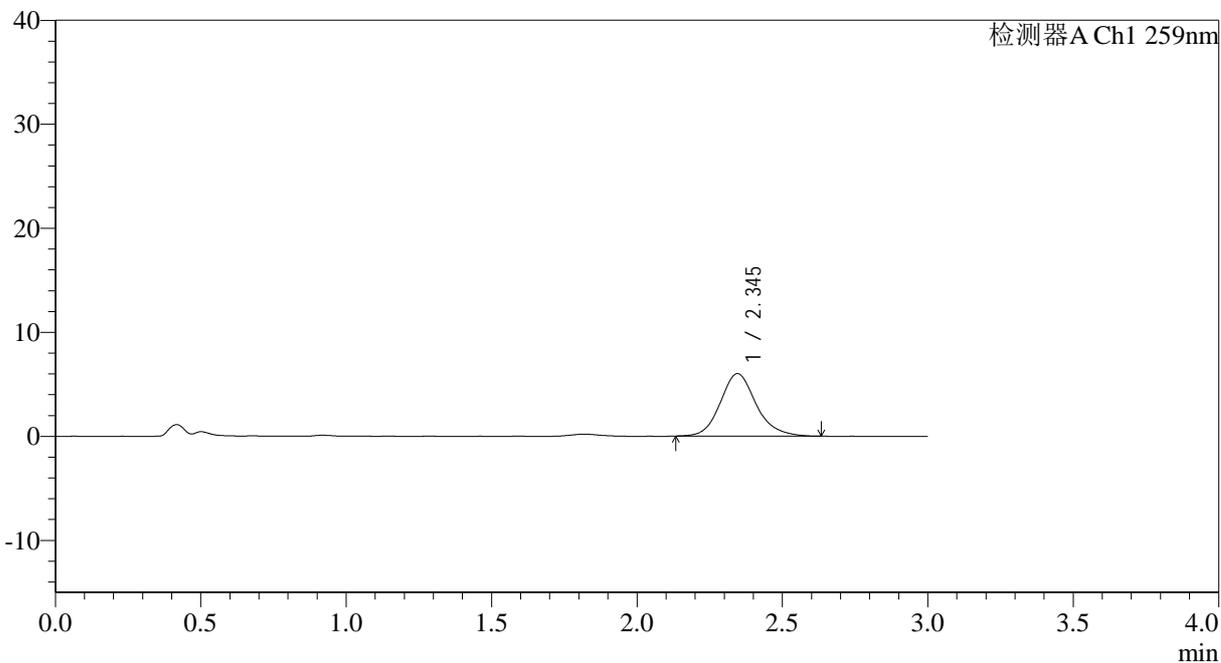

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	51519	100.000	6010	1827	1.153	--
总计		51519	100.000	6010			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1524-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 00:33:54 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:01 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

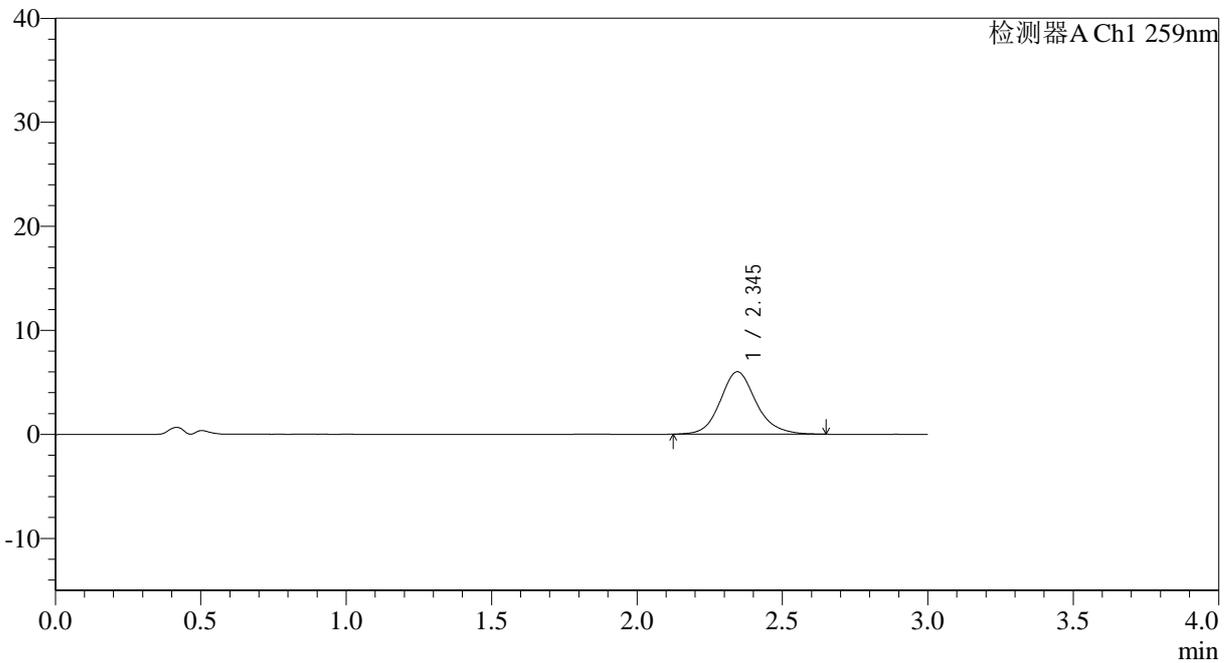

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	51600	100.000	5999	1829	1.142	--
总计		51600	100.000	5999			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1525-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 00:37:17 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:04 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

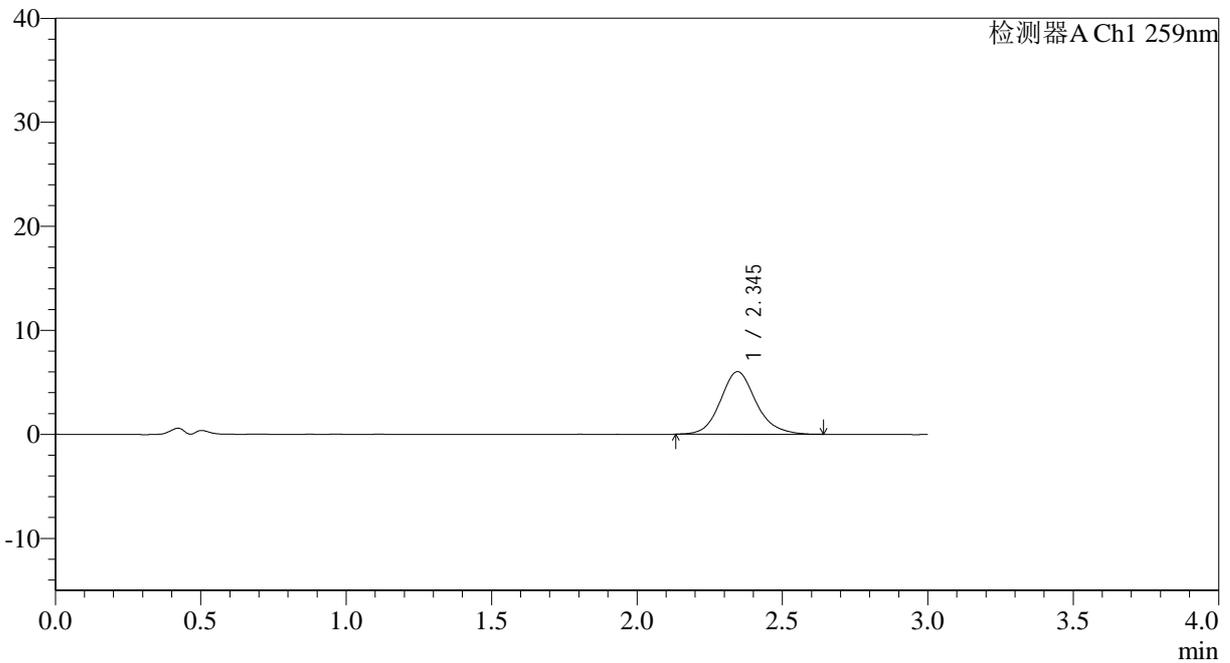

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	51493	100.000	6019	1835	1.135	--
总计		51493	100.000	6019			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1526-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 00:40:42 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:07 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

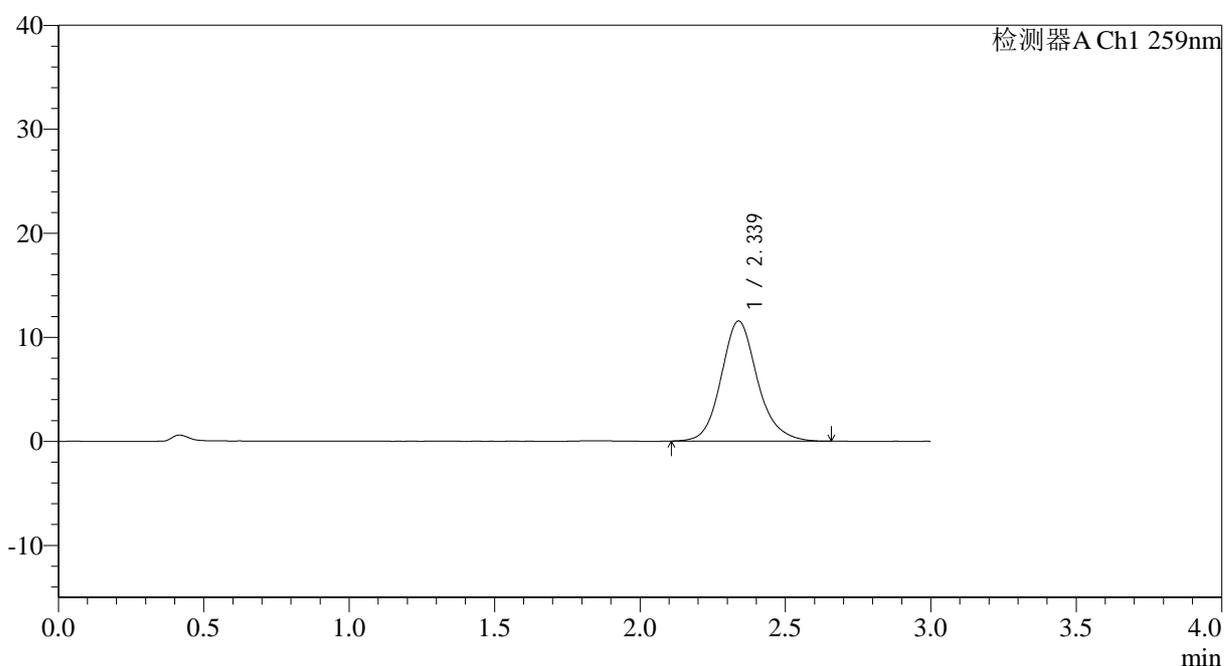

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	100456	100.000	11554	1777	1.144	--
总计		100456	100.000	11554			


图67 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1527-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 00:44:07 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:10 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

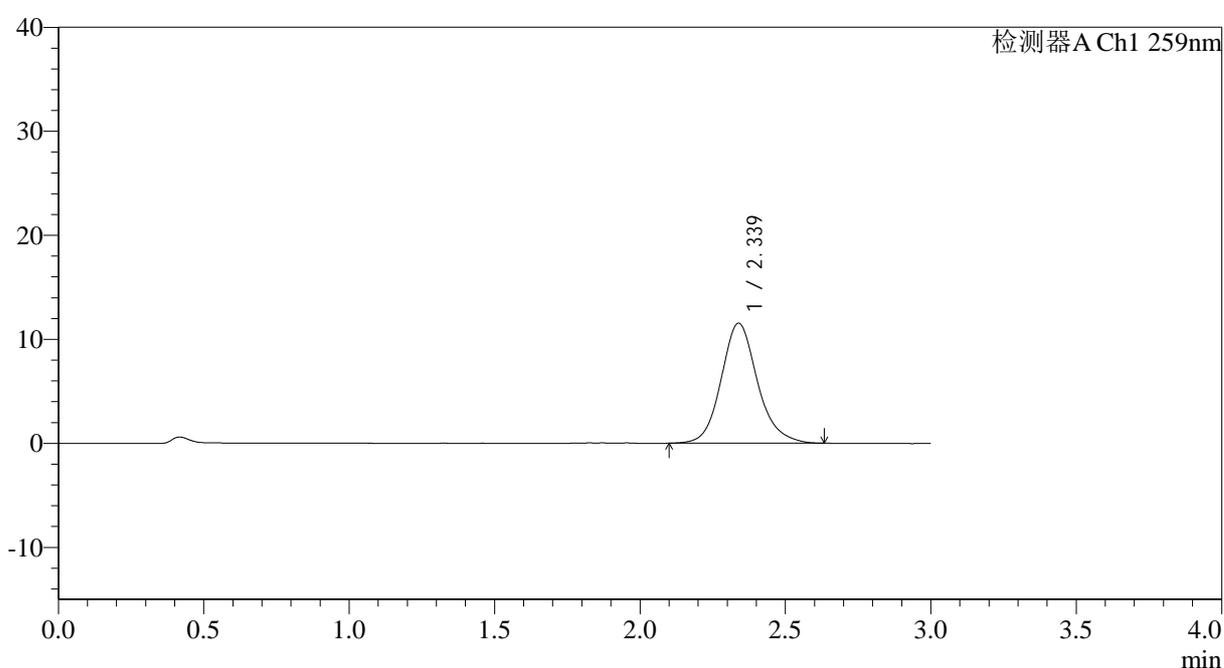

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	100377	100.000	11548	1772	1.142	--
总计		100377	100.000	11548			

图68 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051521批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1528-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-9
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 00:47:30 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:13 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

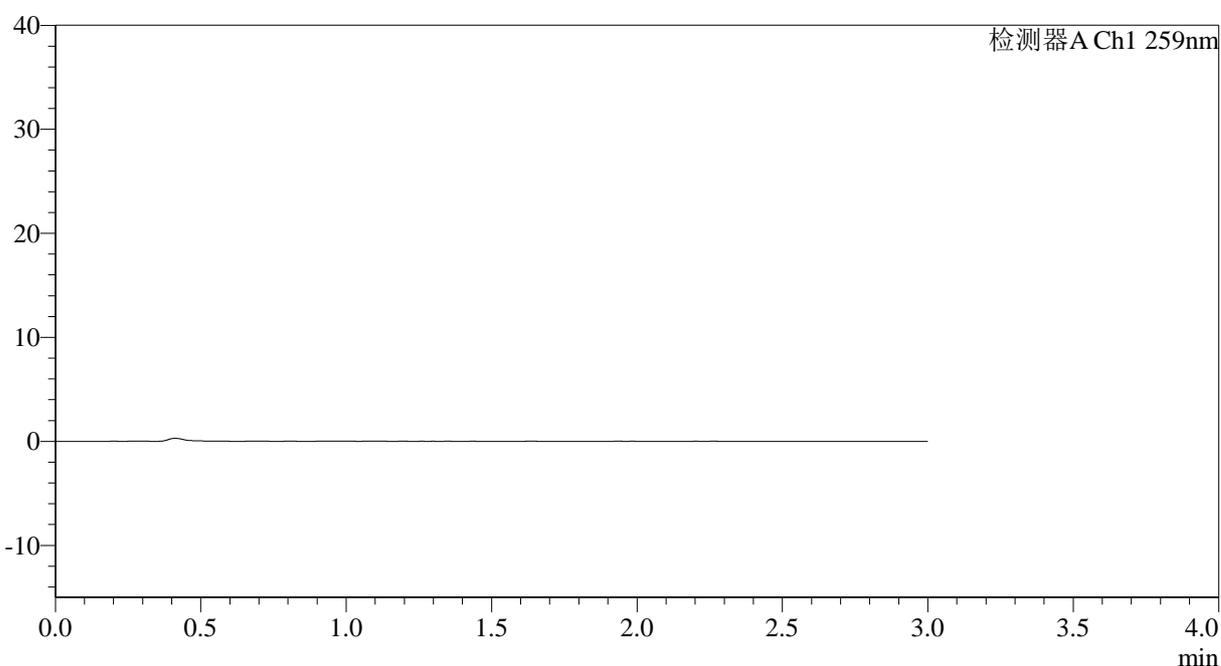

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1529-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 00:50:53 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:16 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

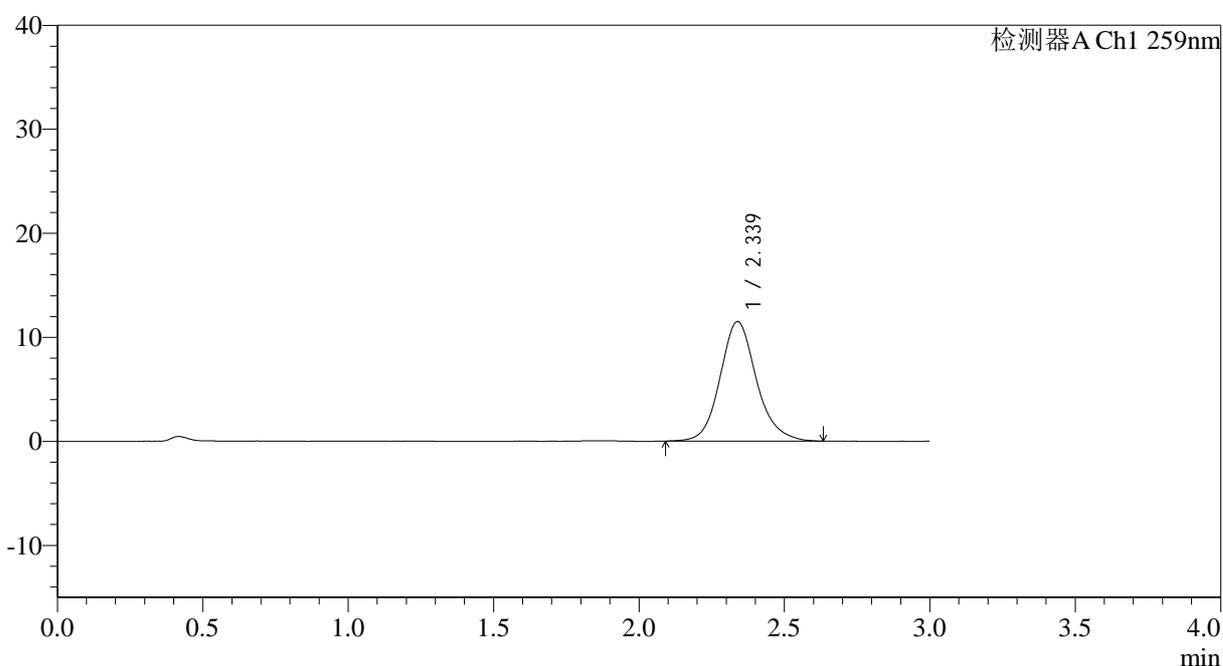

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	100428	100.000	11508	1766	1.140	--
总计		100428	100.000	11508			

图70 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1530-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 00:54:16 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:18 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

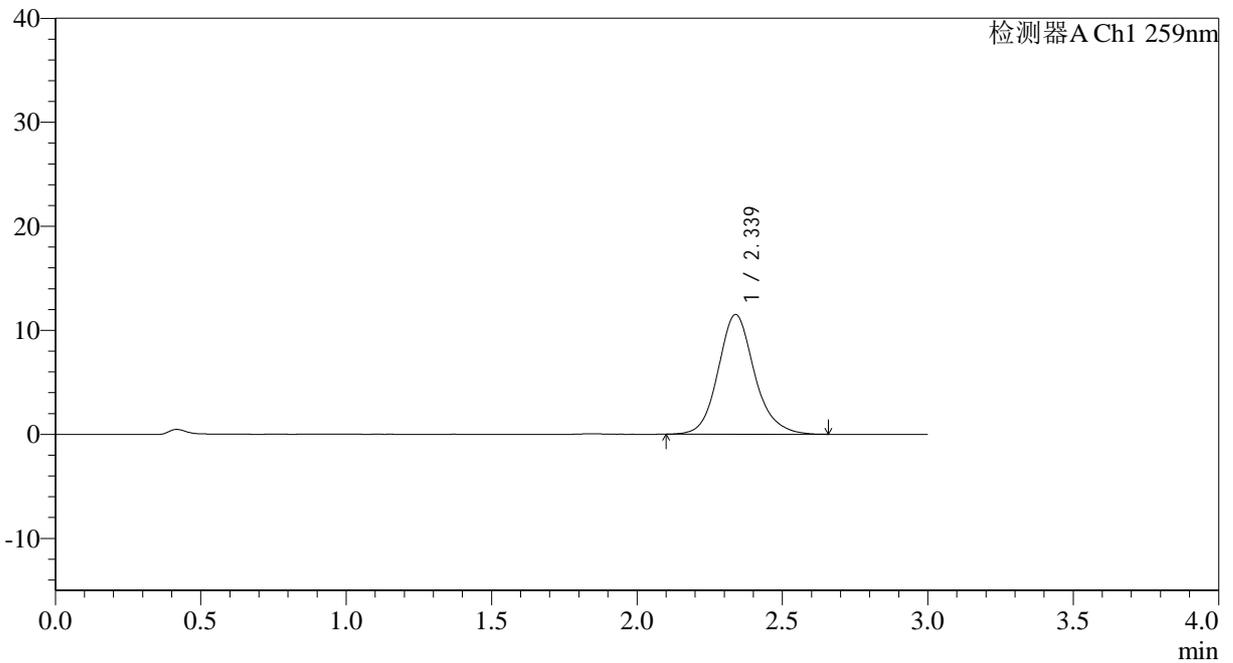

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	100204	100.000	11513	1773	1.139	--
总计		100204	100.000	11513			

图71 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1531-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 00:57:39 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:21 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

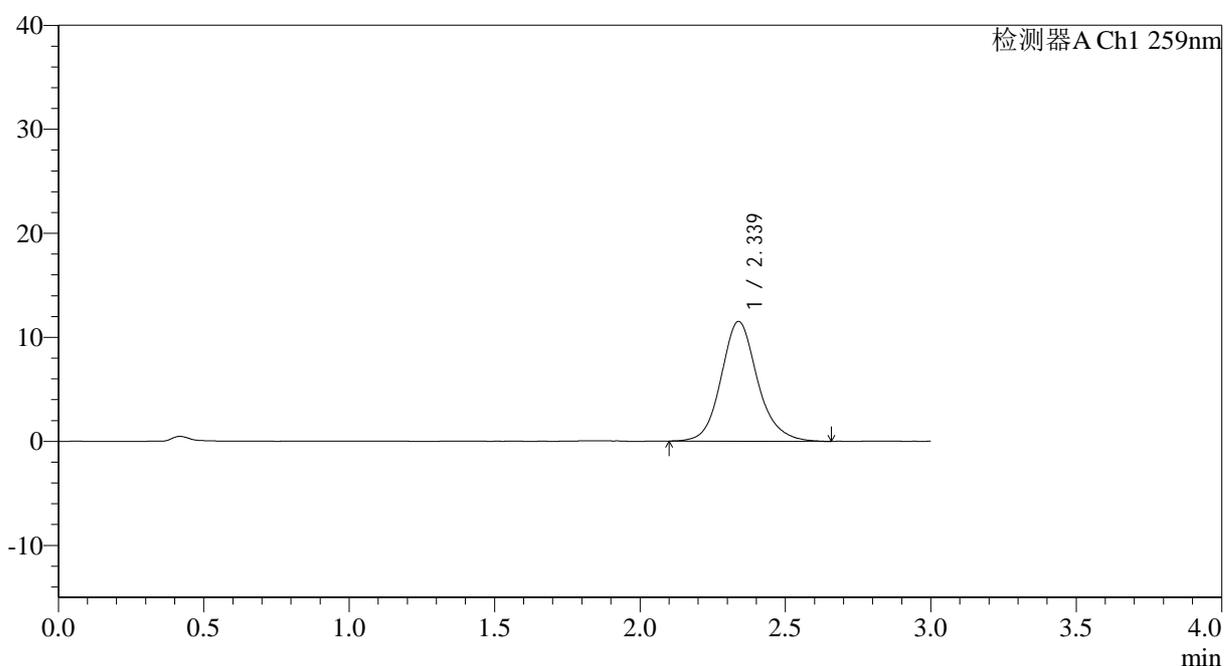

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	100431	100.000	11521	1776	1.141	--
总计		100431	100.000	11521			

图72 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1532-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 01:01:02 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:24 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

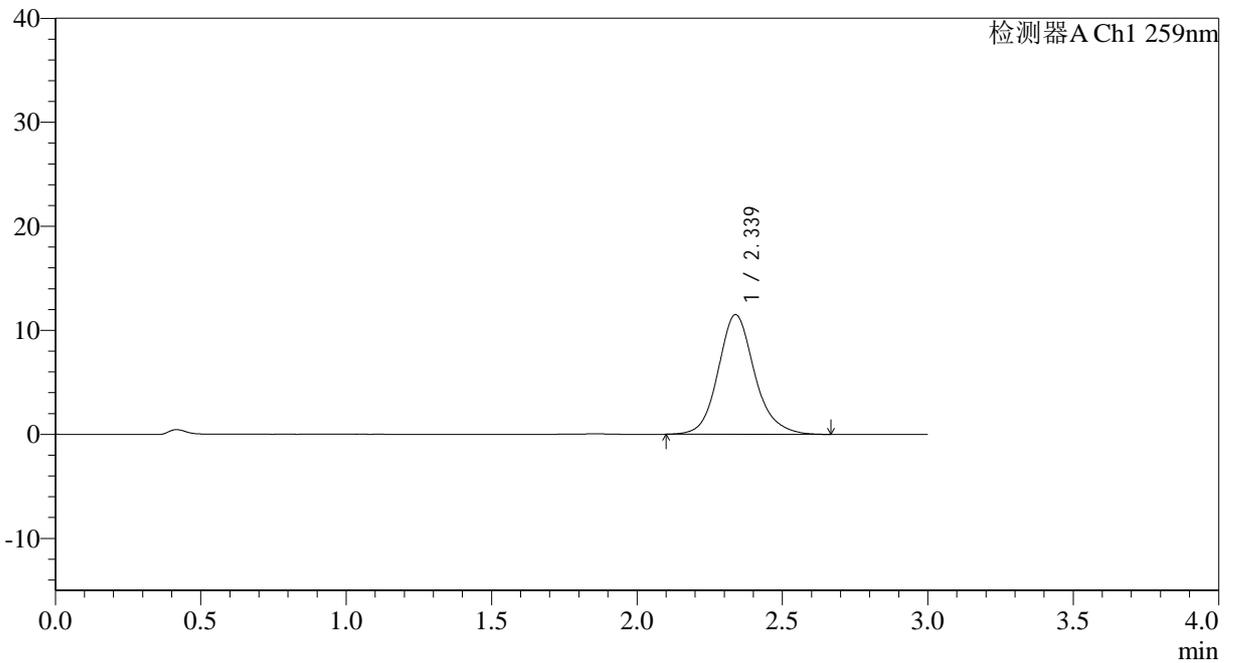

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	100434	100.000	11511	1765	1.144	--
总计		100434	100.000	11511			

图73 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1533-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 01:04:25 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:27 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

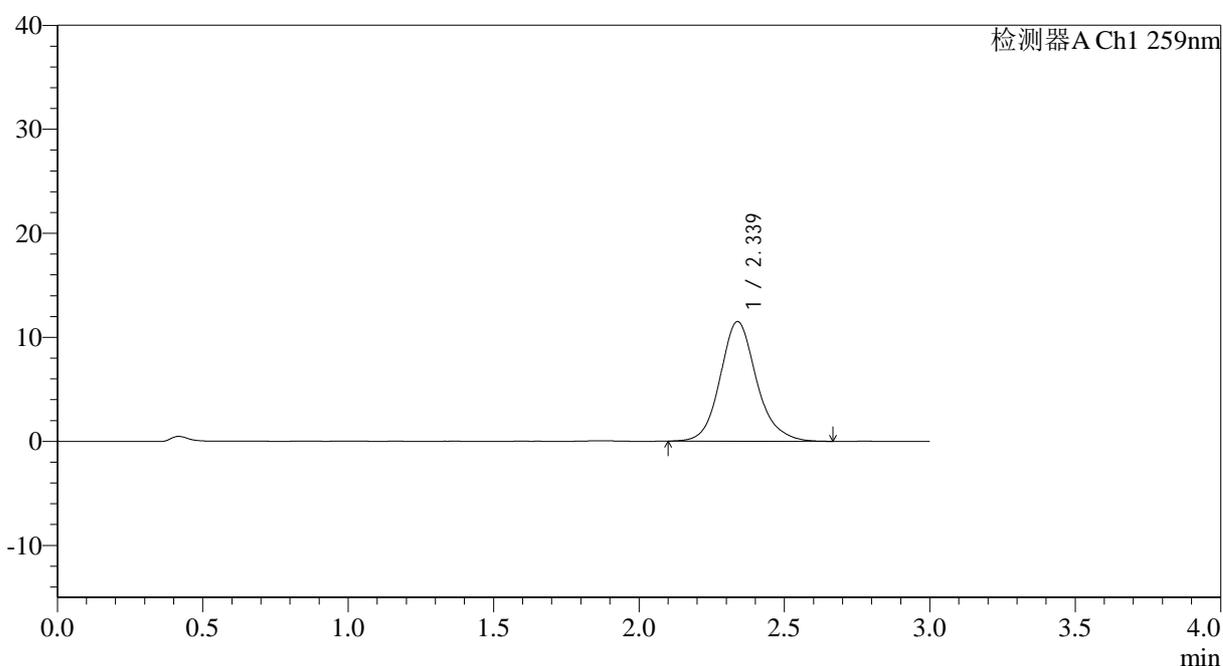

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	100294	100.000	11511	1769	1.144	--
总计		100294	100.000	11511			

图74 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1534-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 01:07:48 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:30 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

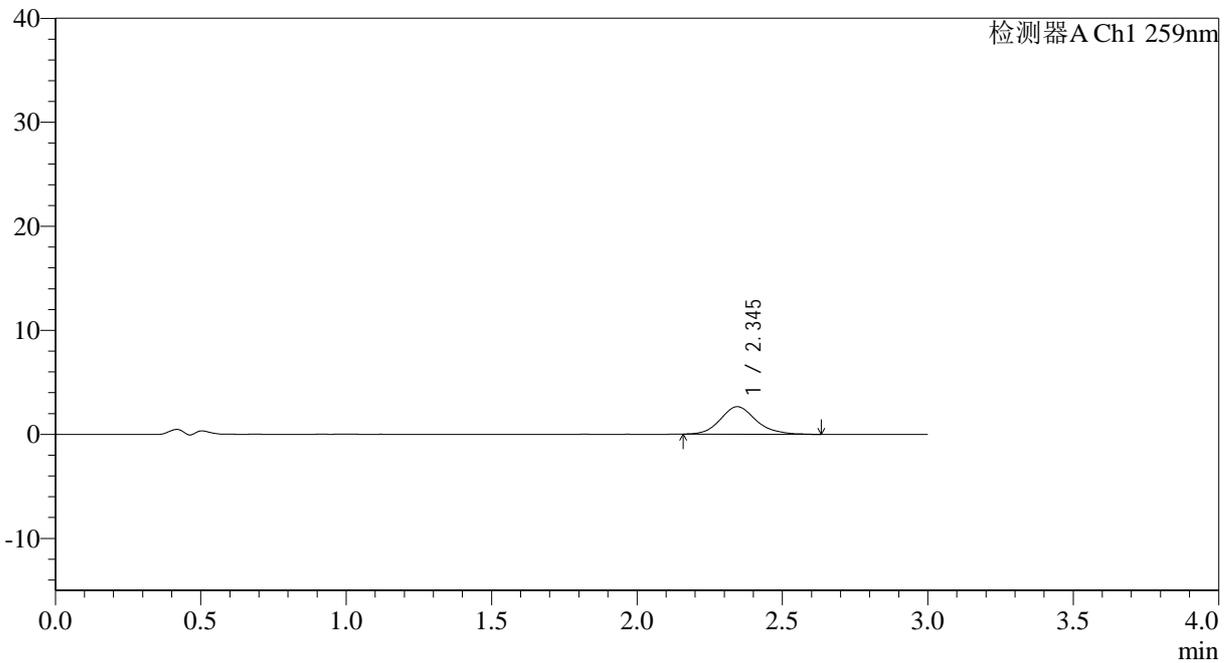

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	22453	100.000	2641	1847	1.160	--
总计		22453	100.000	2641			

图75 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1535-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 01:11:11 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:33 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

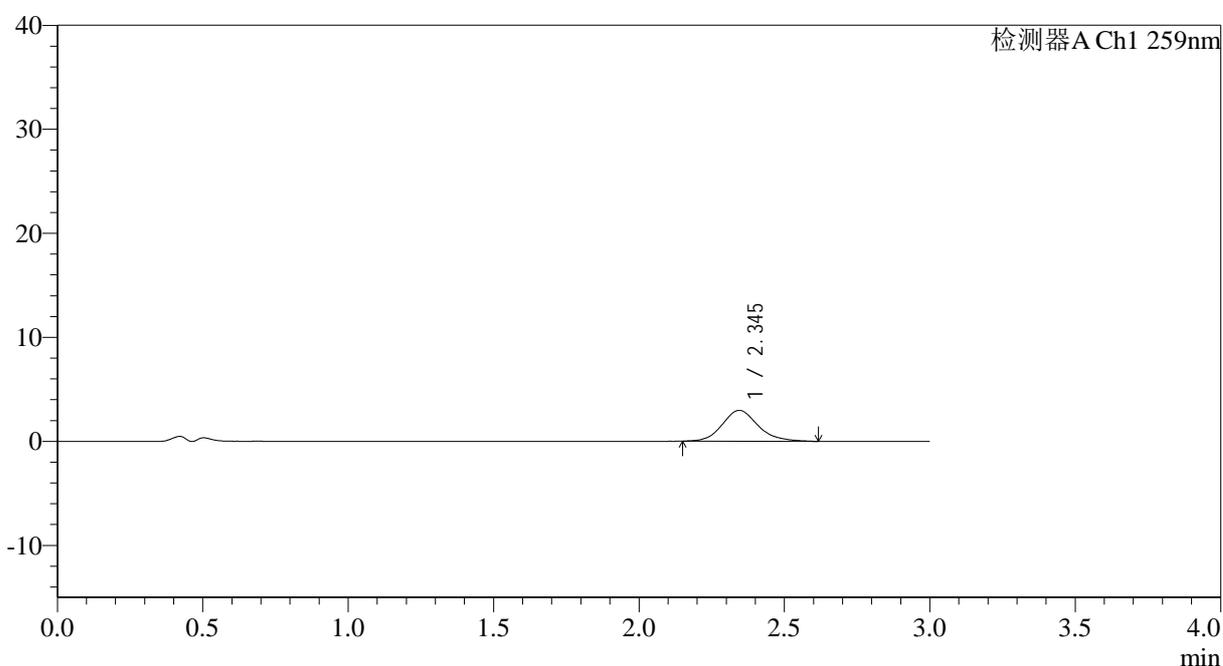

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	25566	100.000	2971	1805	1.159	--
总计		25566	100.000	2971			

图76 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1538-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 01:21:18 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:42 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

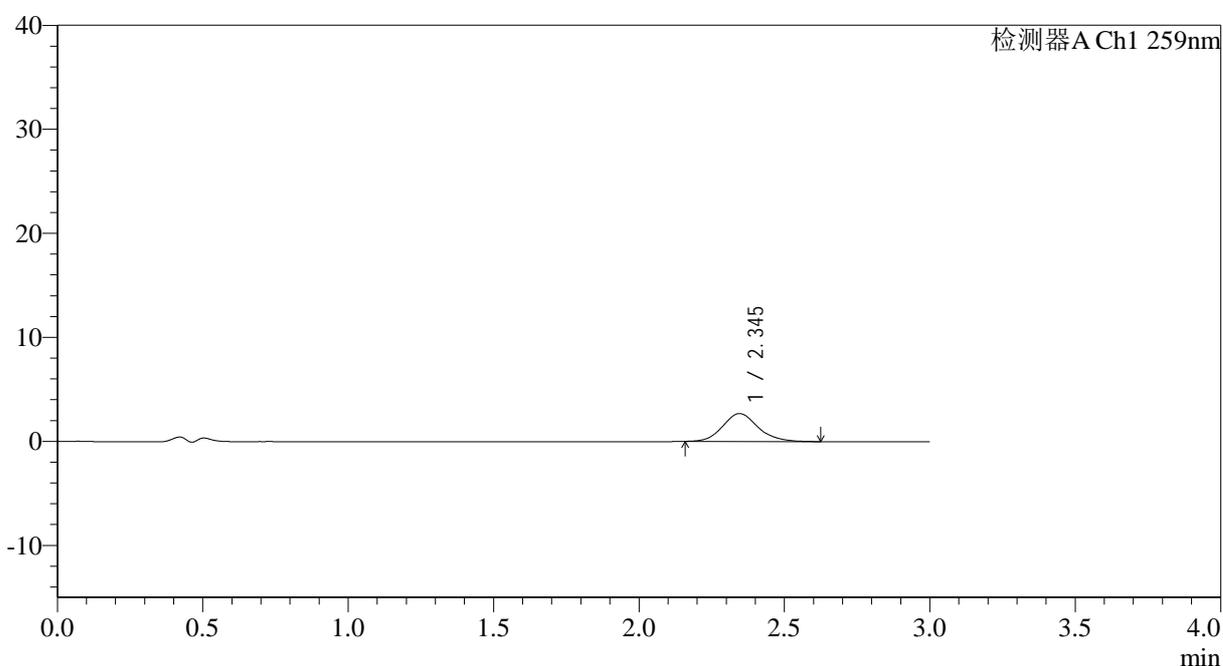

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	22815	100.000	2688	1832	1.146	--
总计		22815	100.000	2688			

图79 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1539-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 01:24:41 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:44 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

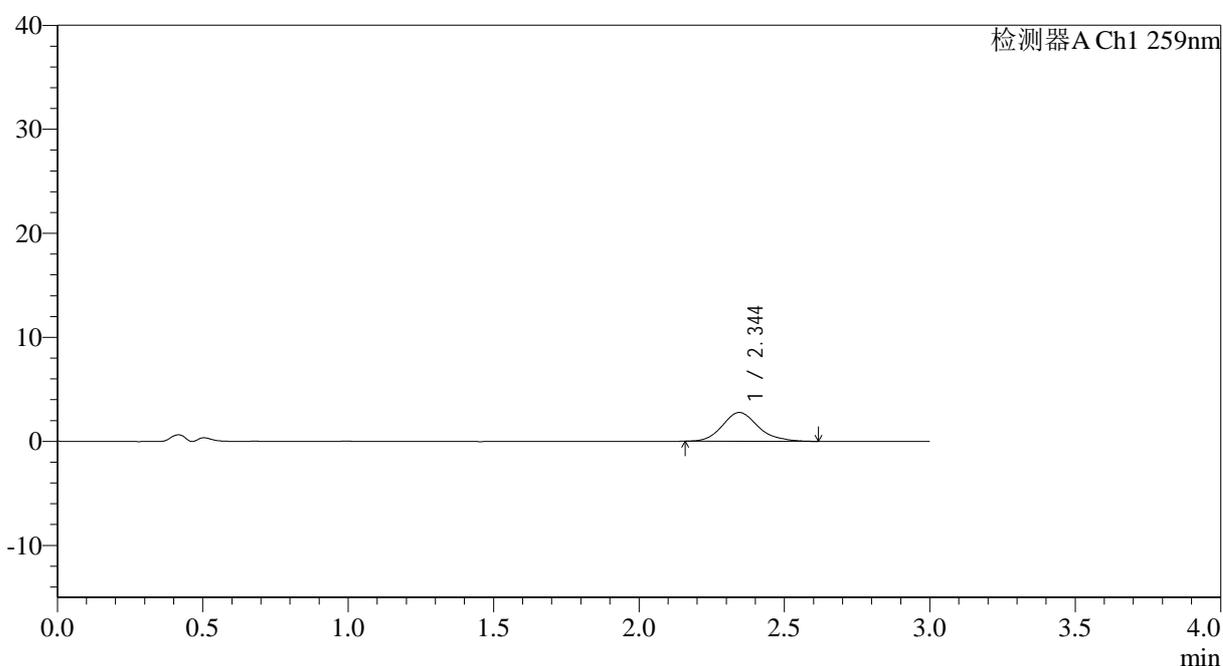

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.344	23754	100.000	2770	1826	1.170	--
总计		23754	100.000	2770			

图80 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1540-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 01:28:04 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:47 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

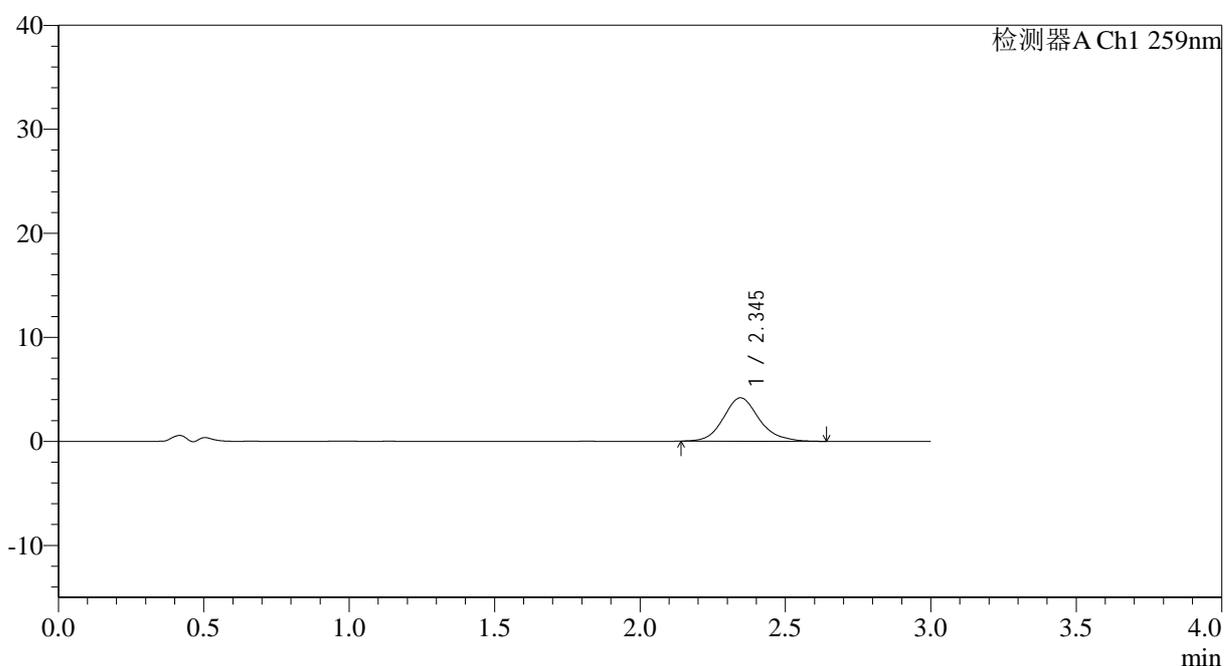

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	35857	100.000	4177	1824	1.153	--
总计		35857	100.000	4177			

图81 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1541-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 01:31:26 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:50 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

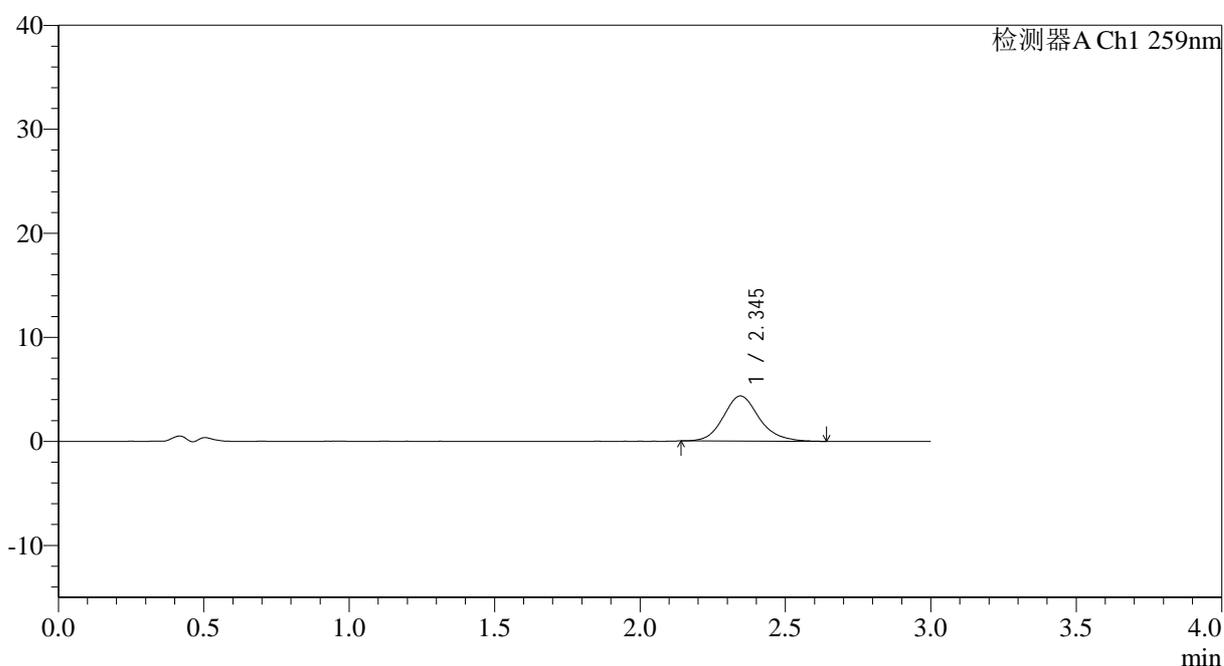

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	37242	100.000	4338	1807	1.156	--
总计		37242	100.000	4338			

图82 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1542-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 01:34:49 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:53 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

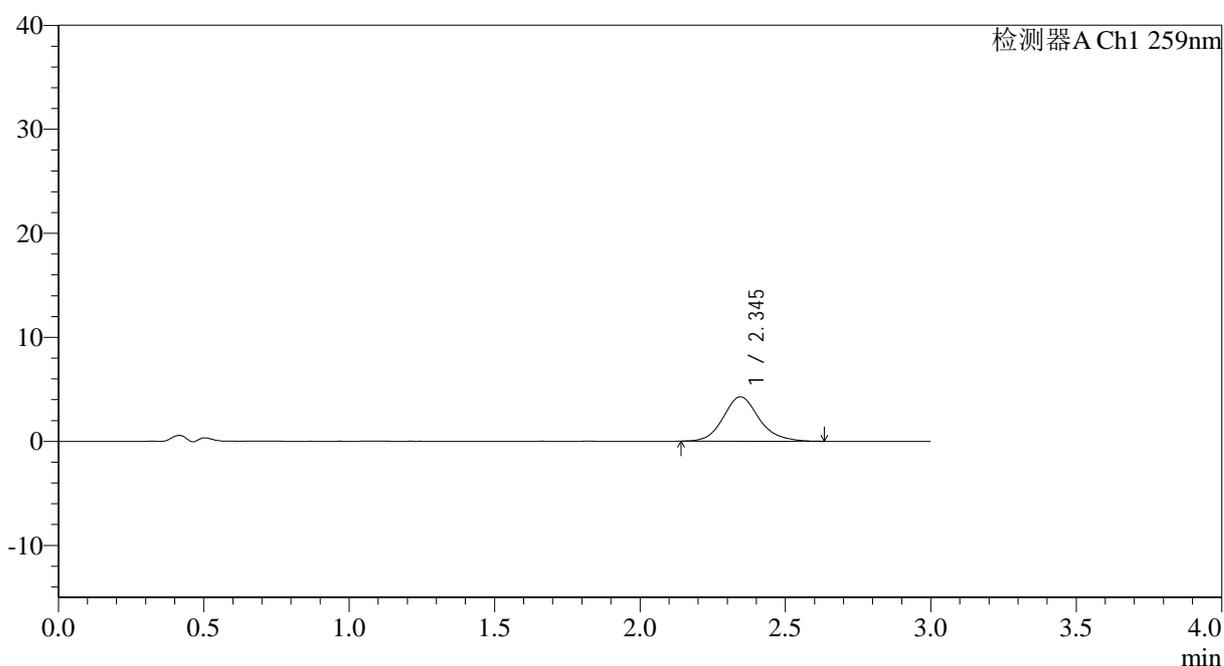

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	36603	100.000	4268	1829	1.147	--
总计		36603	100.000	4268			

图83 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1543-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 01:38:11 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:56 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

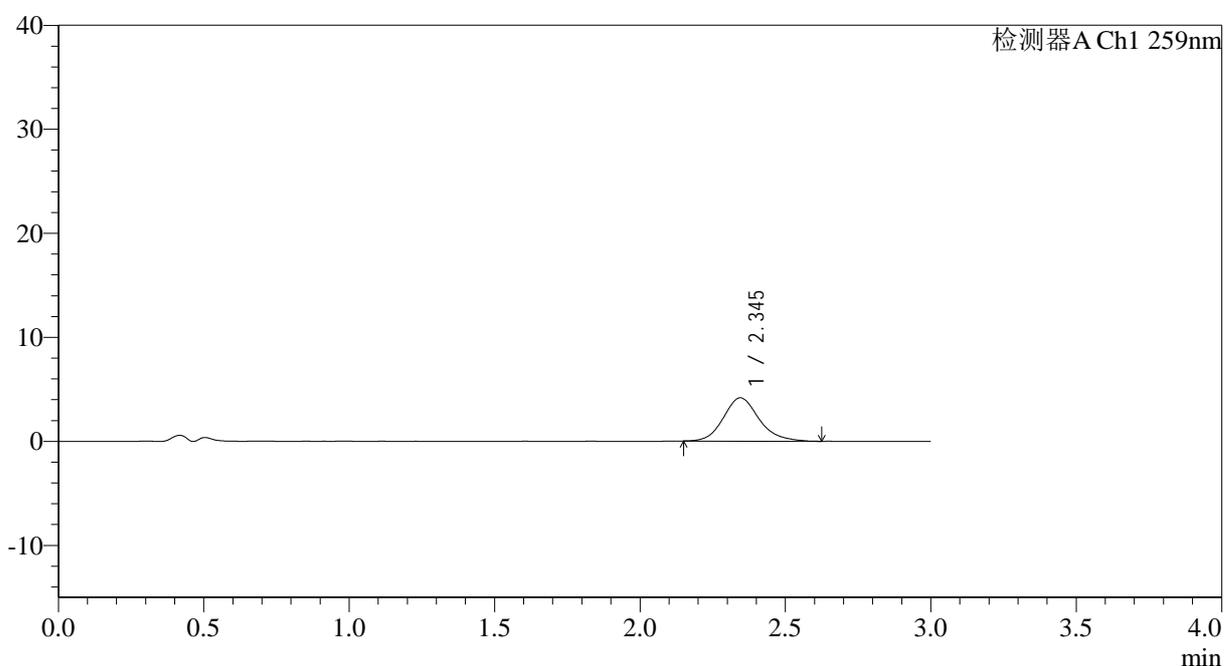

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	35509	100.000	4161	1838	1.163	--
总计		35509	100.000	4161			

图84 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1544-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 01:41:33 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:26:58 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

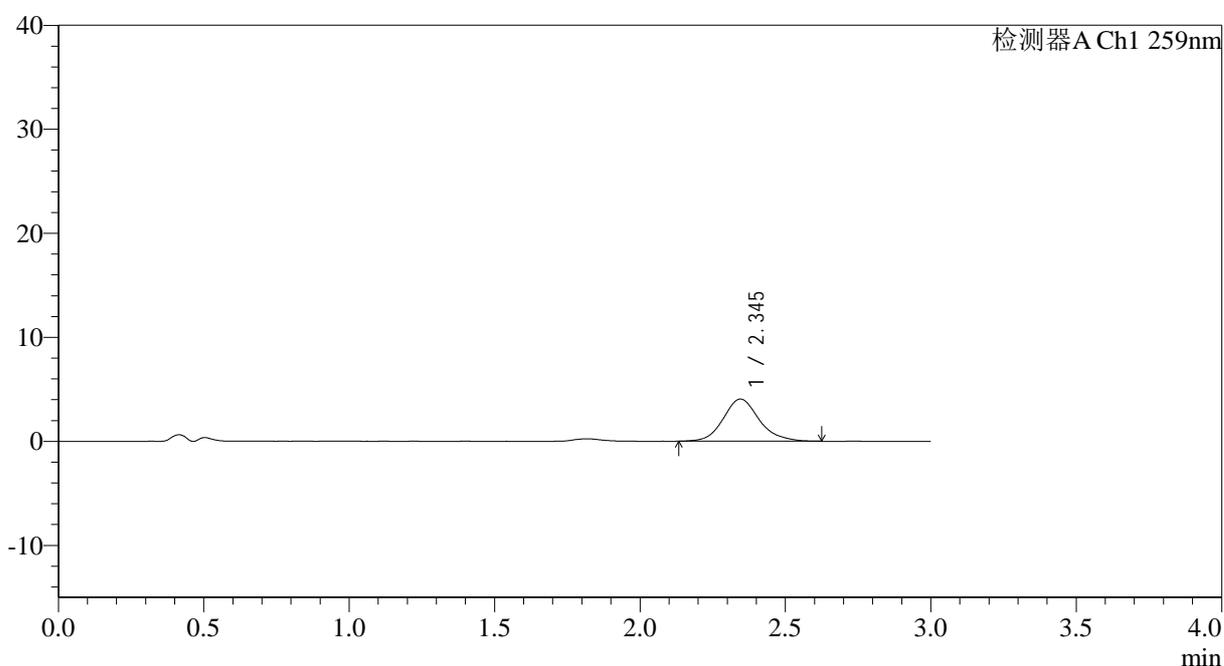

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	34932	100.000	4050	1819	1.145	--
总计		34932	100.000	4050			

图85 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1547-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 01:51:40 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:27:07 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

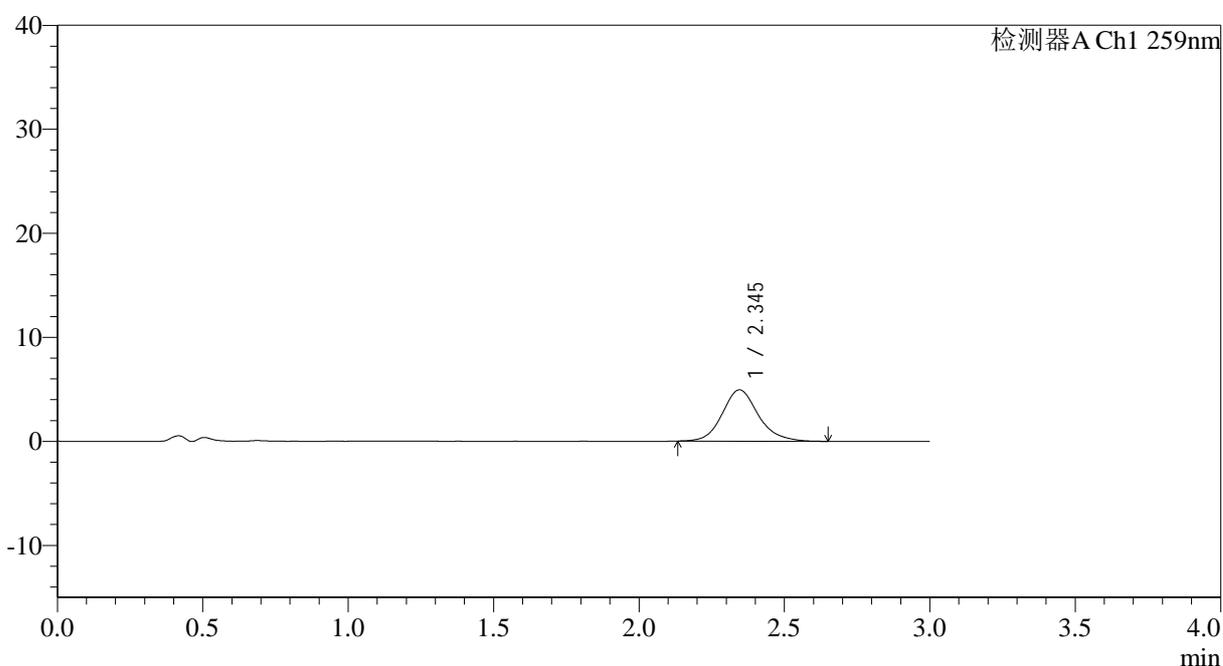

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	42744	100.000	4939	1812	1.153	--
总计		42744	100.000	4939			

图88 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1549-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 01:58:25 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:27:13 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

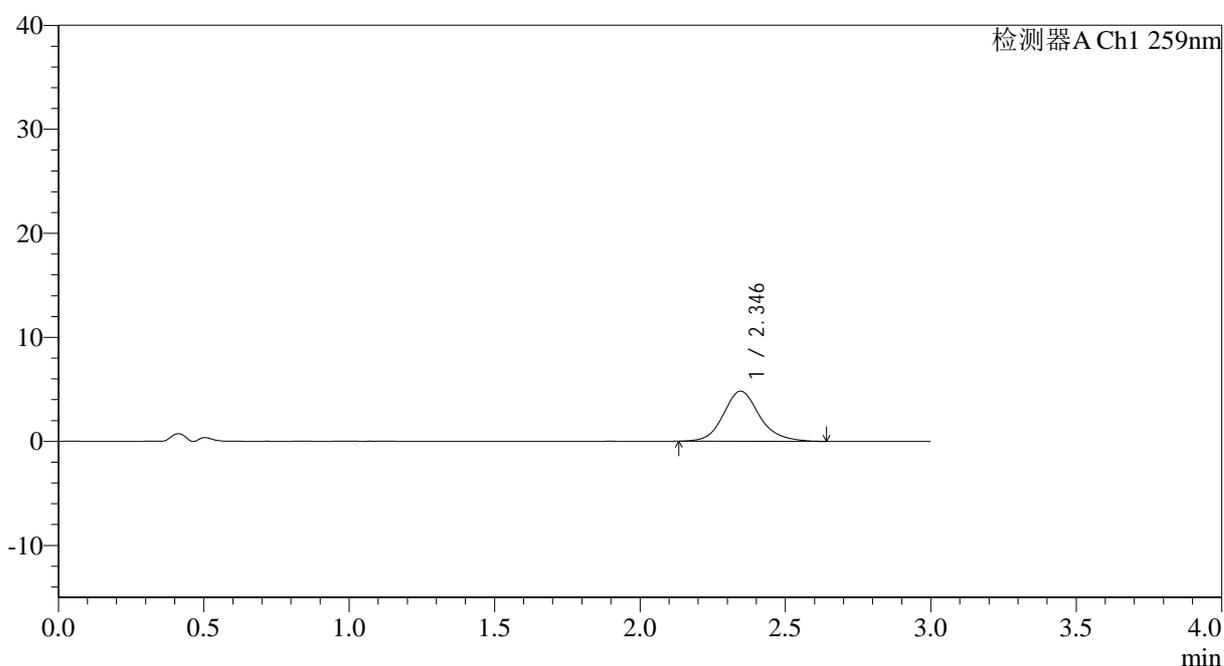

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	41801	100.000	4825	1810	1.153	--
总计		41801	100.000	4825			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1550-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 02:01:47 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:27:16 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

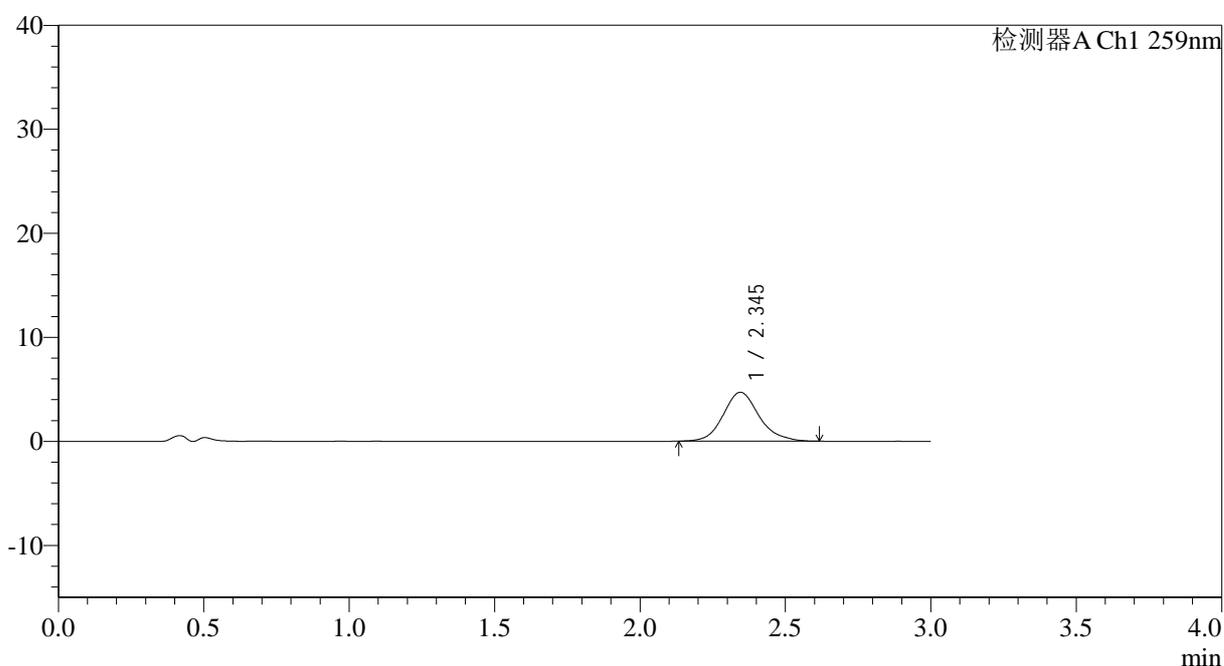

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	40517	100.000	4705	1813	1.145	--
总计		40517	100.000	4705			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1551-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 02:05:09 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:27:19 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

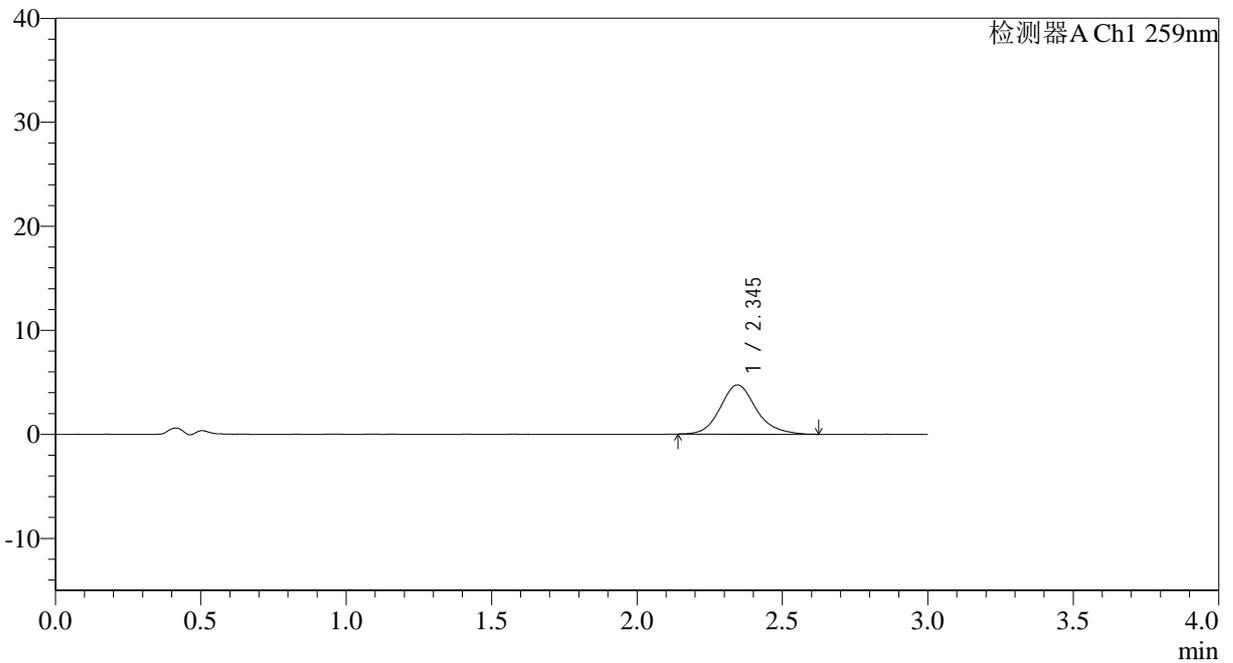

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	40771	100.000	4735	1818	1.154	--
总计		40771	100.000	4735			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1552-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 02:08:31 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:27:22 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

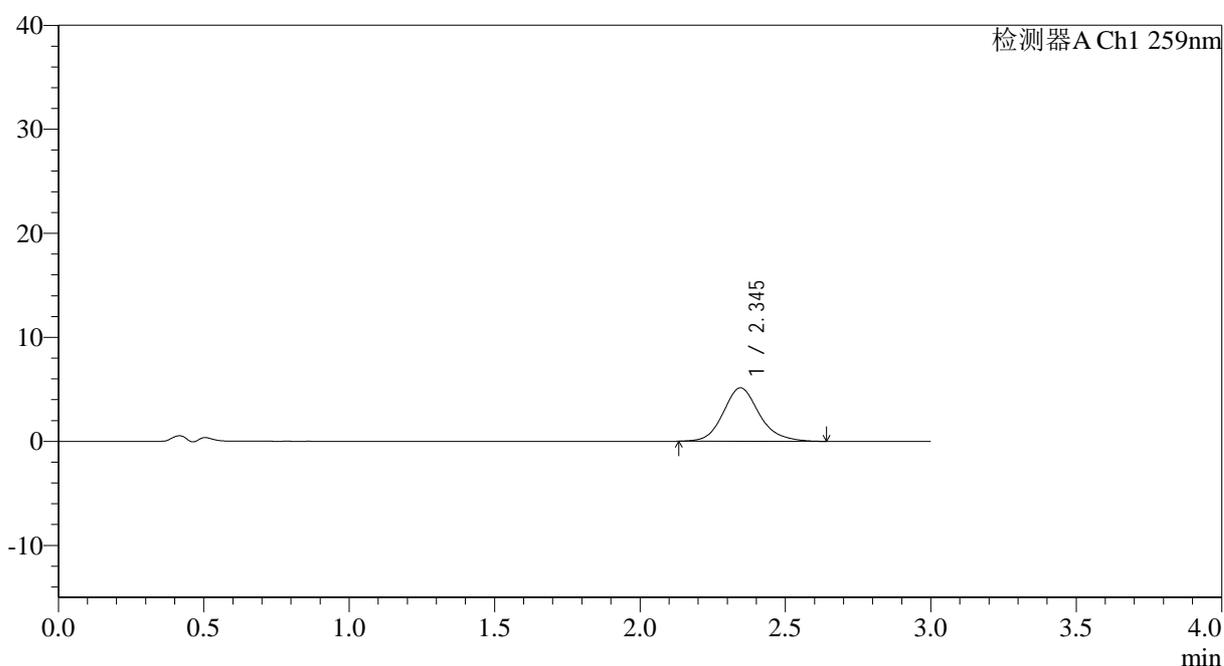

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	44354	100.000	5139	1788	1.151	--
总计		44354	100.000	5139			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1553-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 02:11:54 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:27:25 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

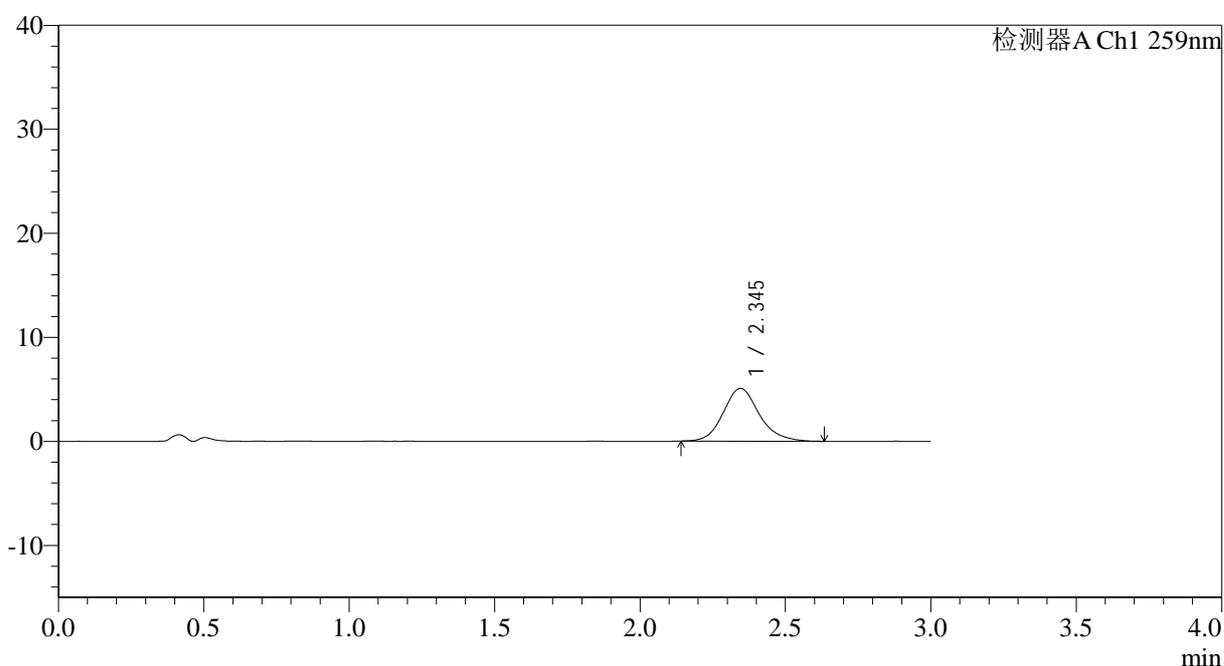

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	43641	100.000	5076	1809	1.150	--
总计		43641	100.000	5076			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1554-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 02:15:16 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:27:27 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

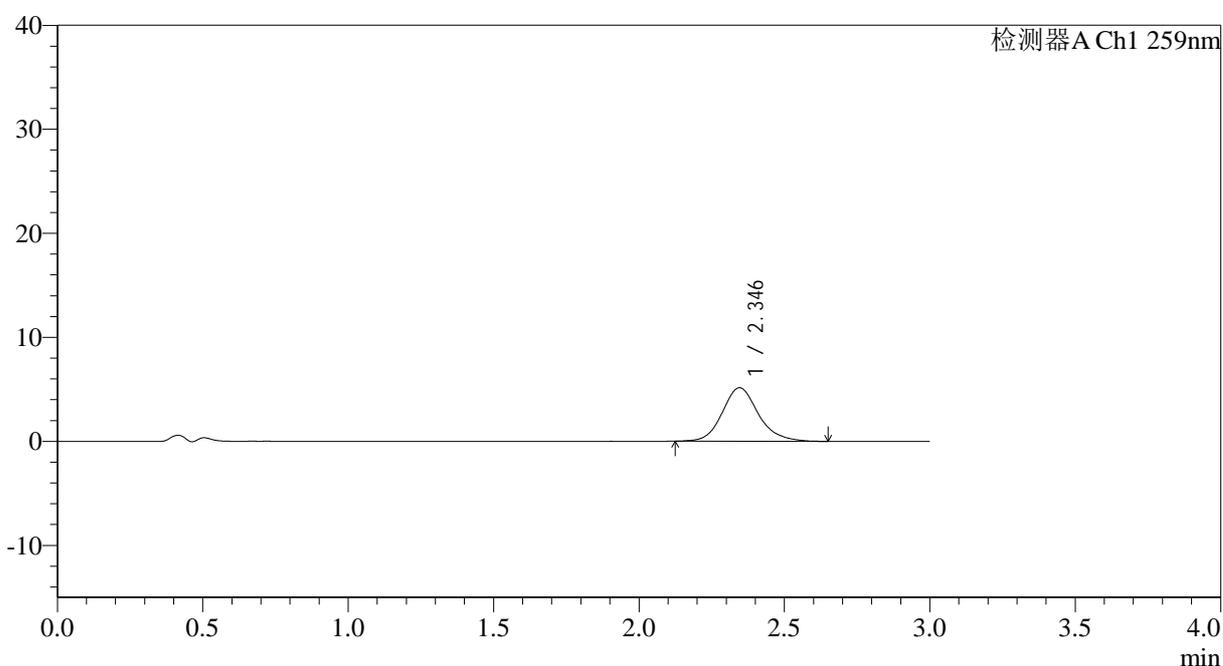

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	44633	100.000	5155	1808	1.151	--
总计		44633	100.000	5155			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1556-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 02:22:00 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:27:33 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

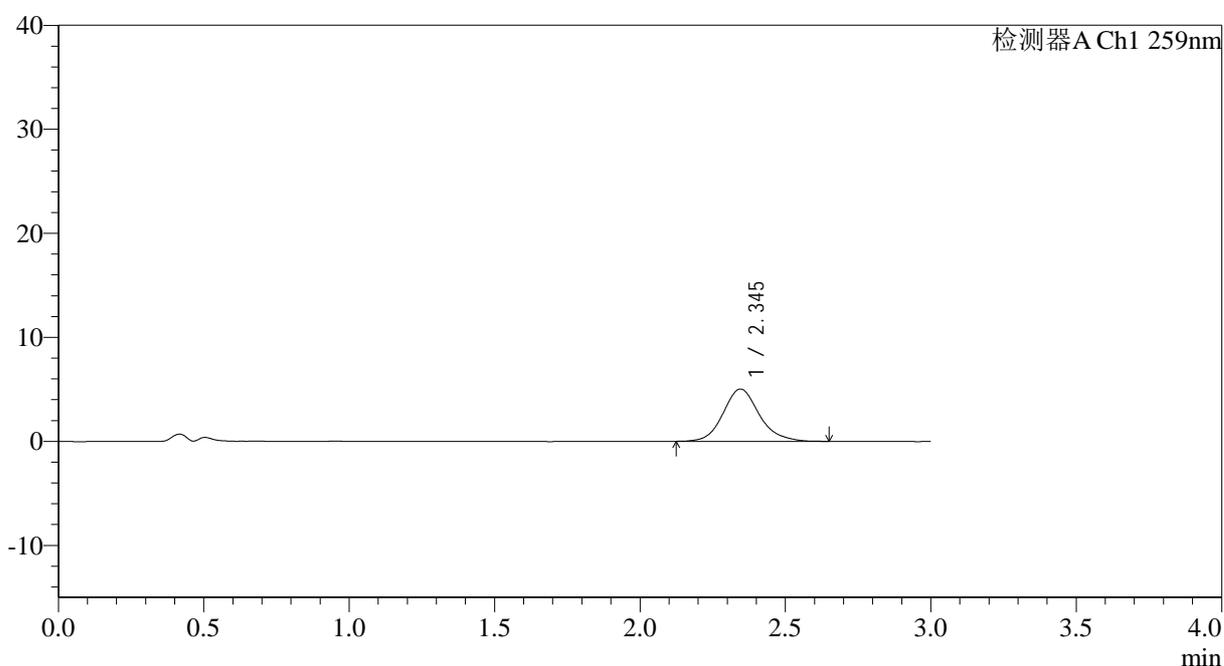

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	43563	100.000	5030	1793	1.144	--
总计		43563	100.000	5030			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1557-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 02:25:22 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:27:36 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

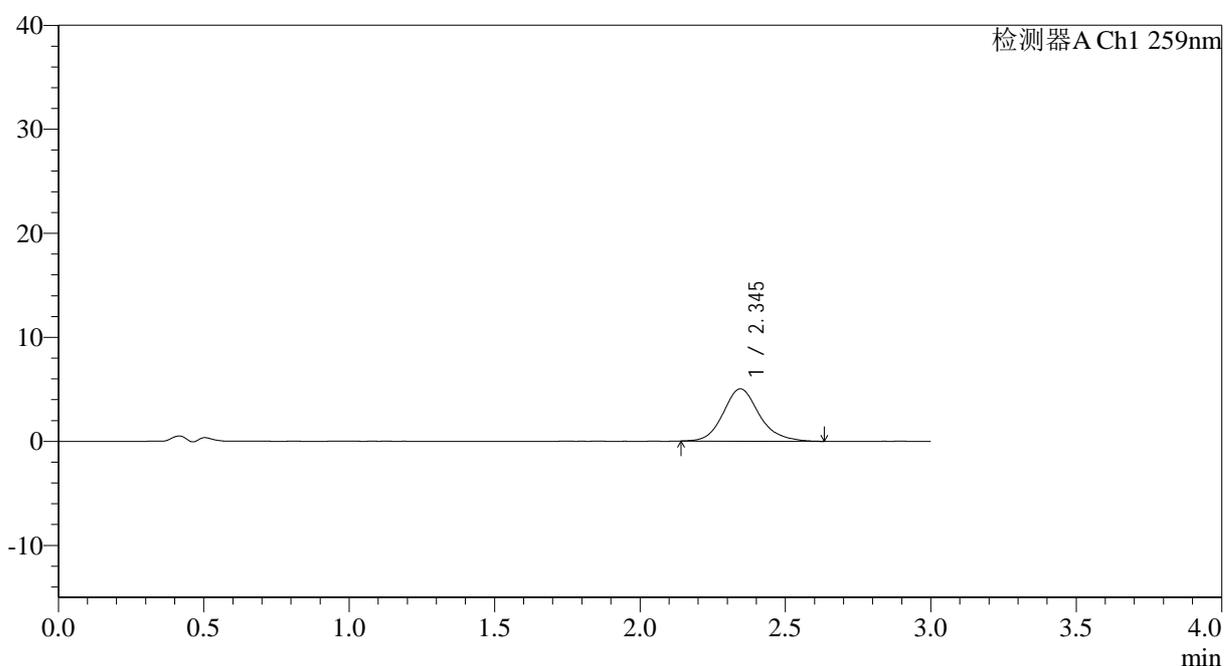

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	43387	100.000	5028	1809	1.161	--
总计		43387	100.000	5028			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1558-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 02:28:45 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:27:39 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

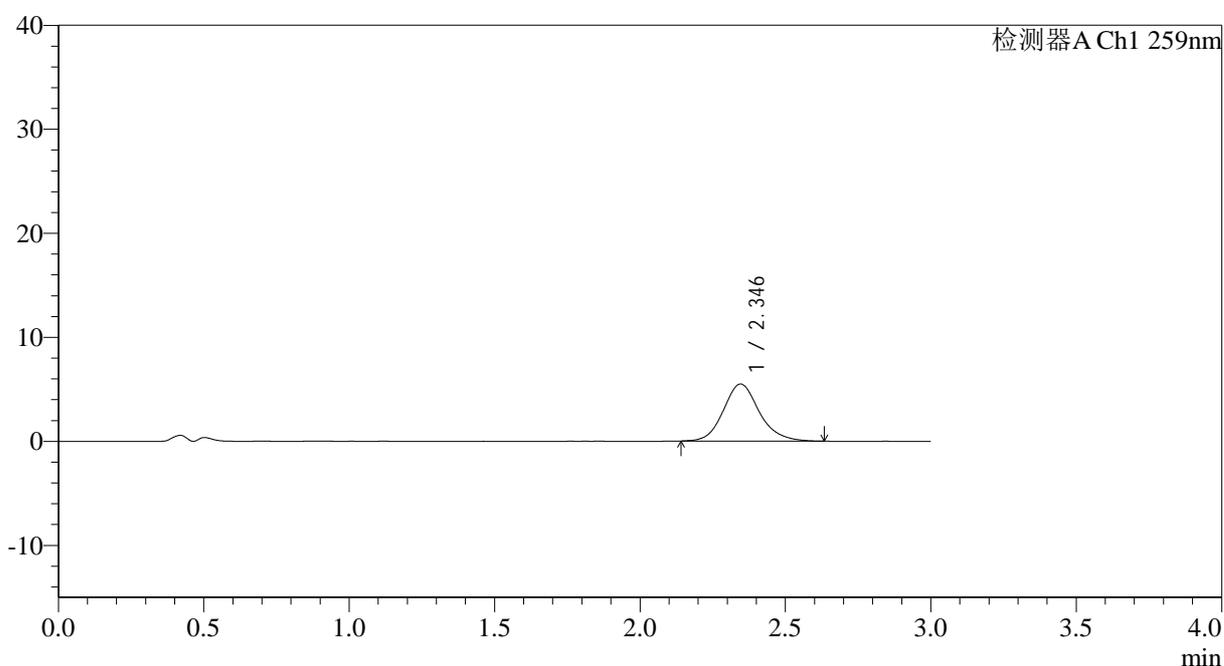

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	47254	100.000	5491	1812	1.143	--
总计		47254	100.000	5491			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1559-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 02:32:07 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:27:42 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

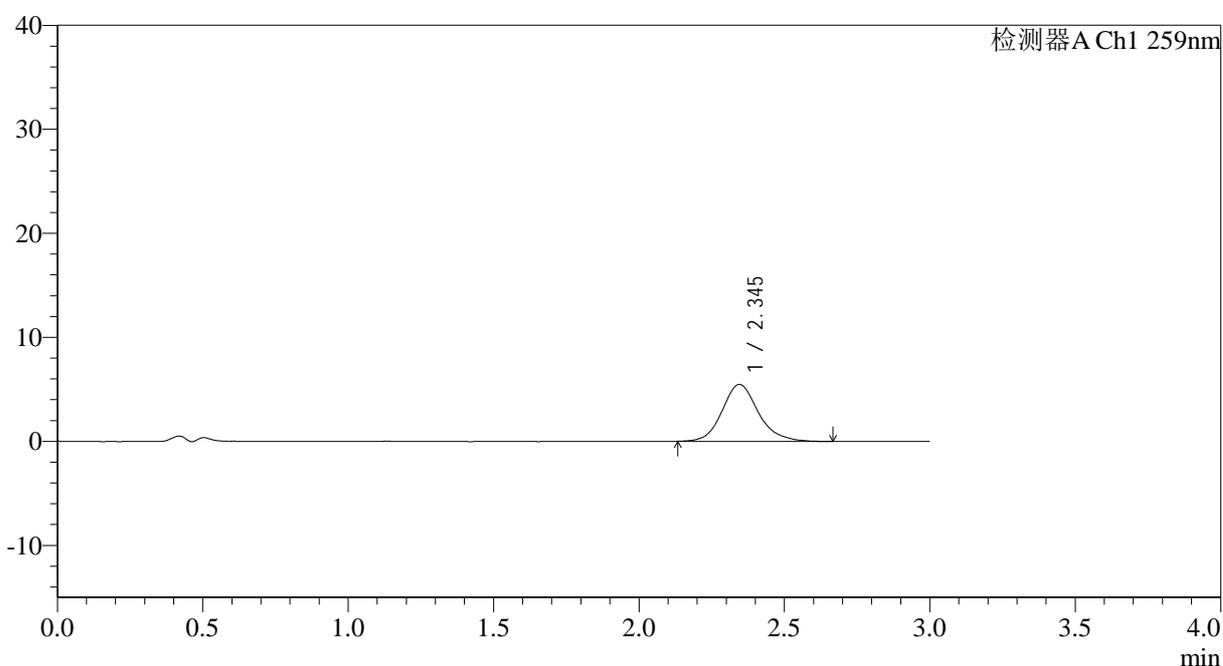

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	47628	100.000	5475	1796	1.151	--
总计		47628	100.000	5475			

图100 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-
 片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1560-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 02:35:29 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:27:44 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

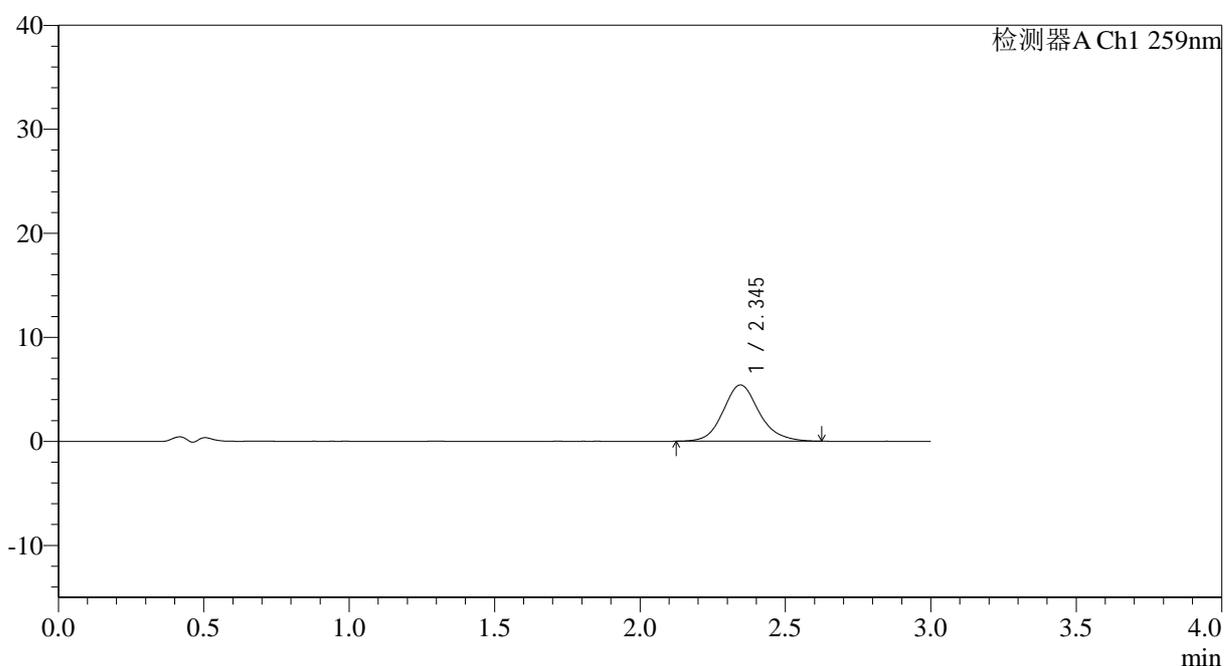

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	46723	100.000	5408	1802	1.137	--
总计		46723	100.000	5408			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1561-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 02:38:52 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:27:47 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

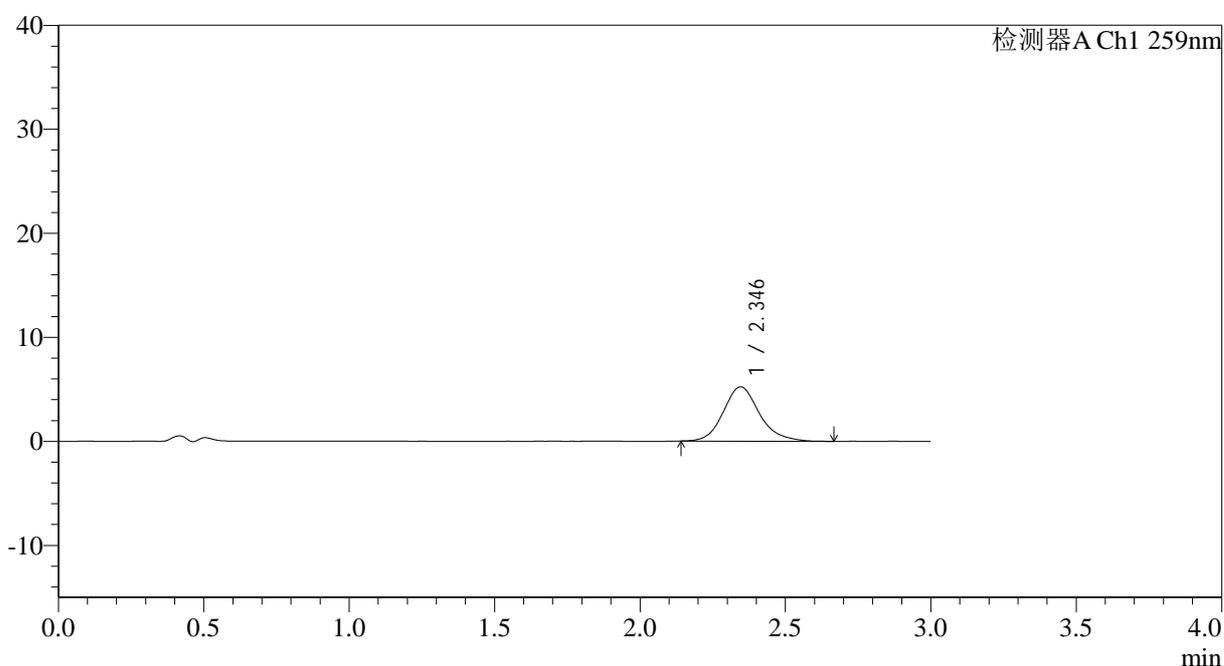

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	45363	100.000	5229	1793	1.165	--
总计		45363	100.000	5229			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1562-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-41 版本号: 6.115
 进样体积: 20 μl 实验者: liuqihuizi
 进样时间: 2025/07/02 02:42:14 处理者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:27:50
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

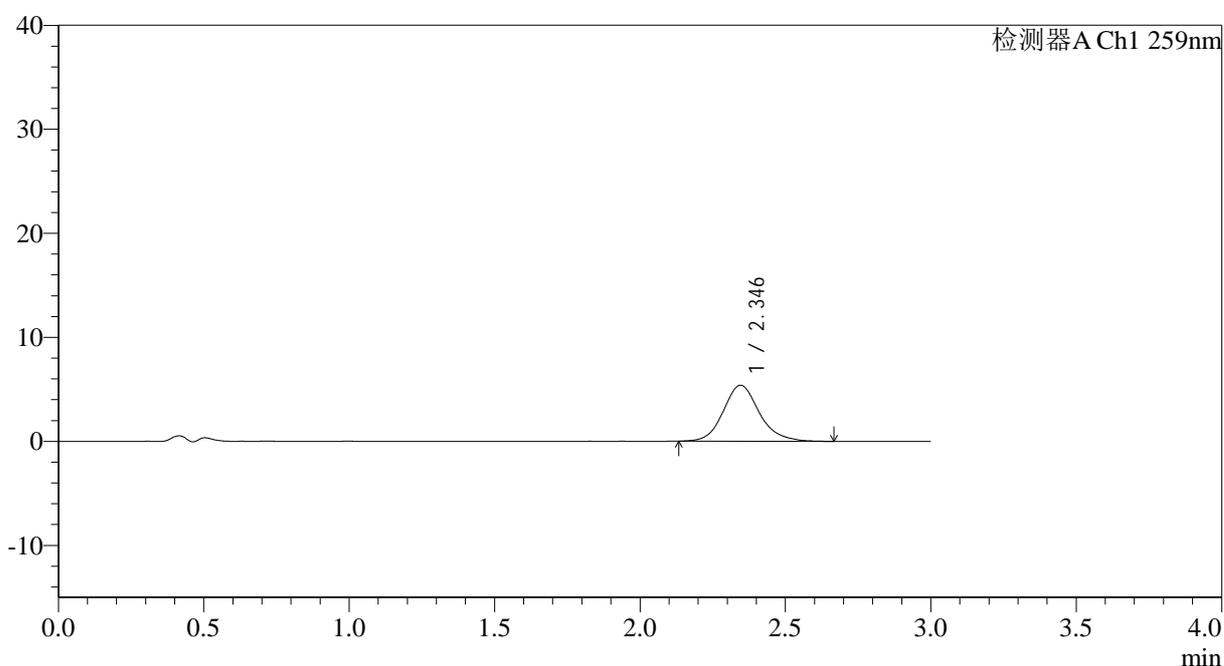

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	46552	100.000	5383	1813	1.147	--
总计		46552	100.000	5383			

图103 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1564-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 02:48:58 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:27:56 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

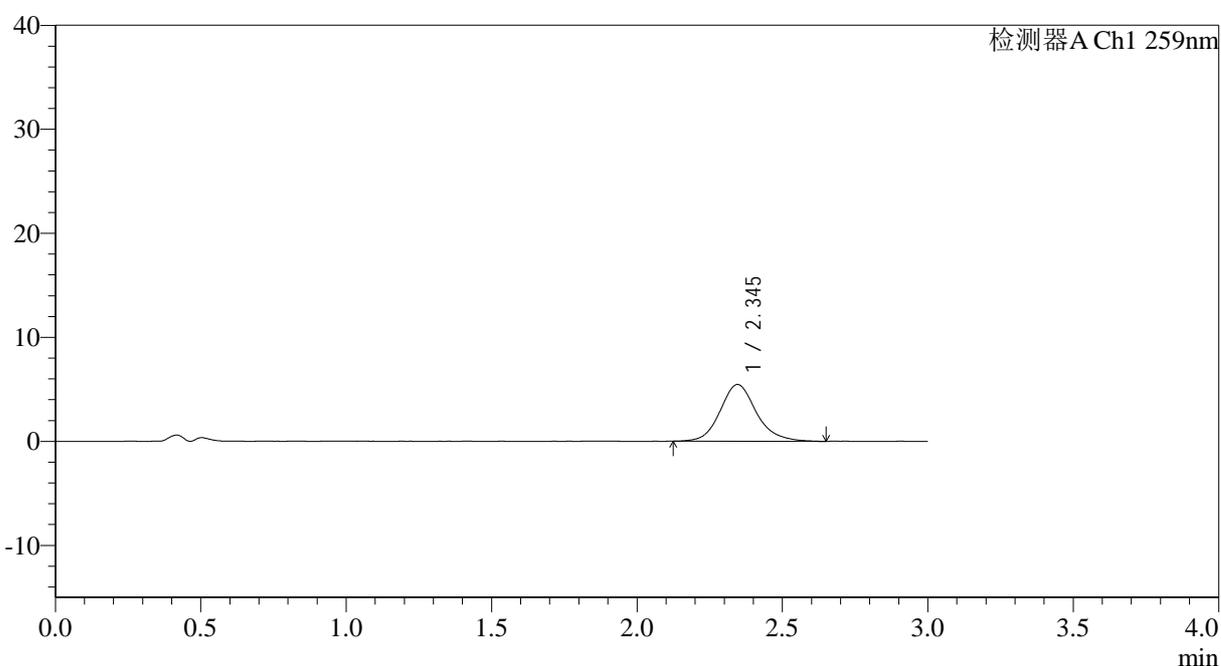

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	47349	100.000	5457	1806	1.148	--
总计		47349	100.000	5457			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1565-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 02:52:20 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:27:59 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

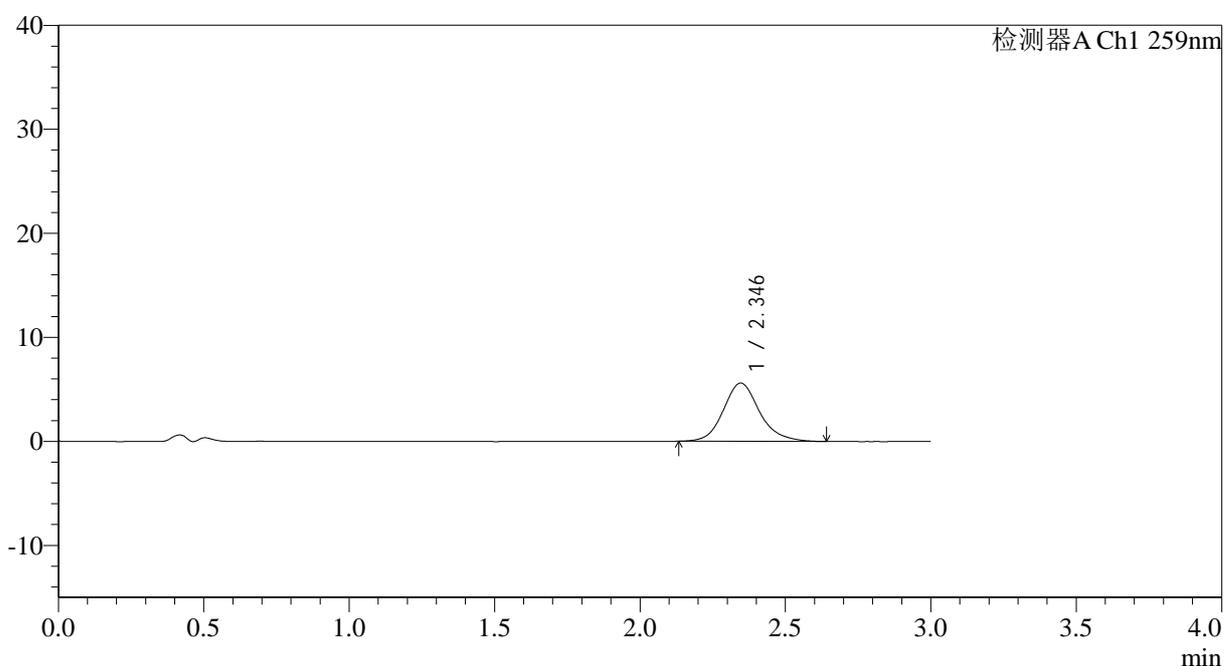

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	48494	100.000	5604	1810	1.150	--
总计		48494	100.000	5604			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1566-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 02:55:43 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:28:01 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

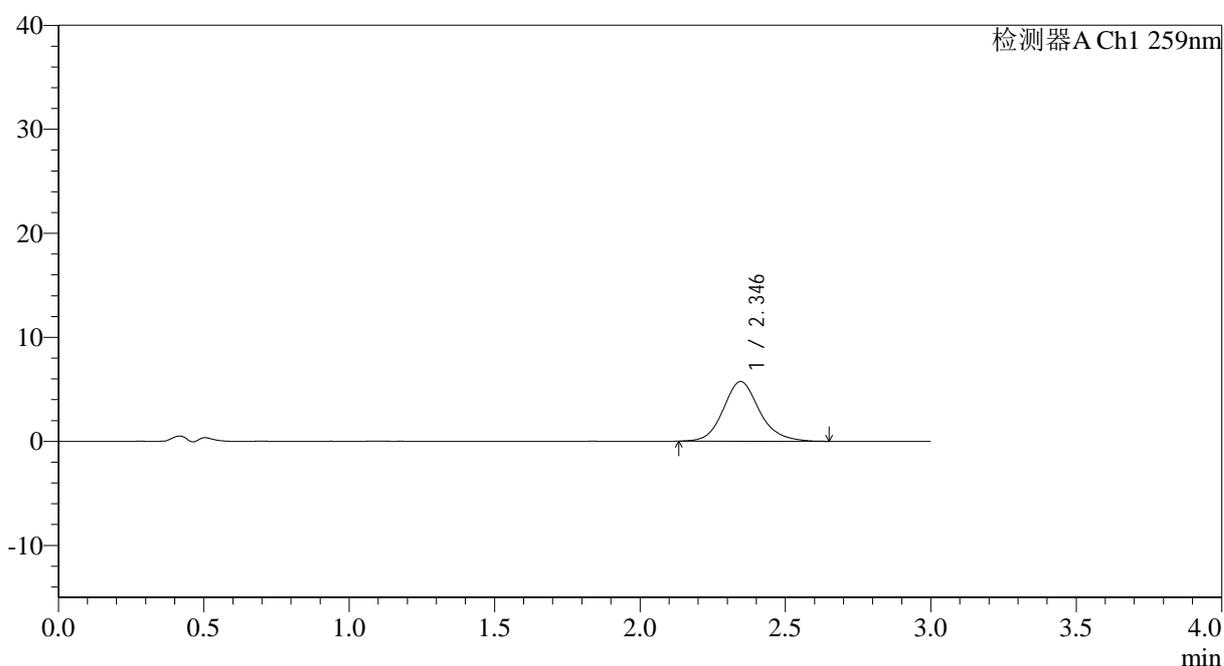

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	49760	100.000	5737	1806	1.146	--
总计		49760	100.000	5737			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1568-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 03:02:26 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:28:08 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

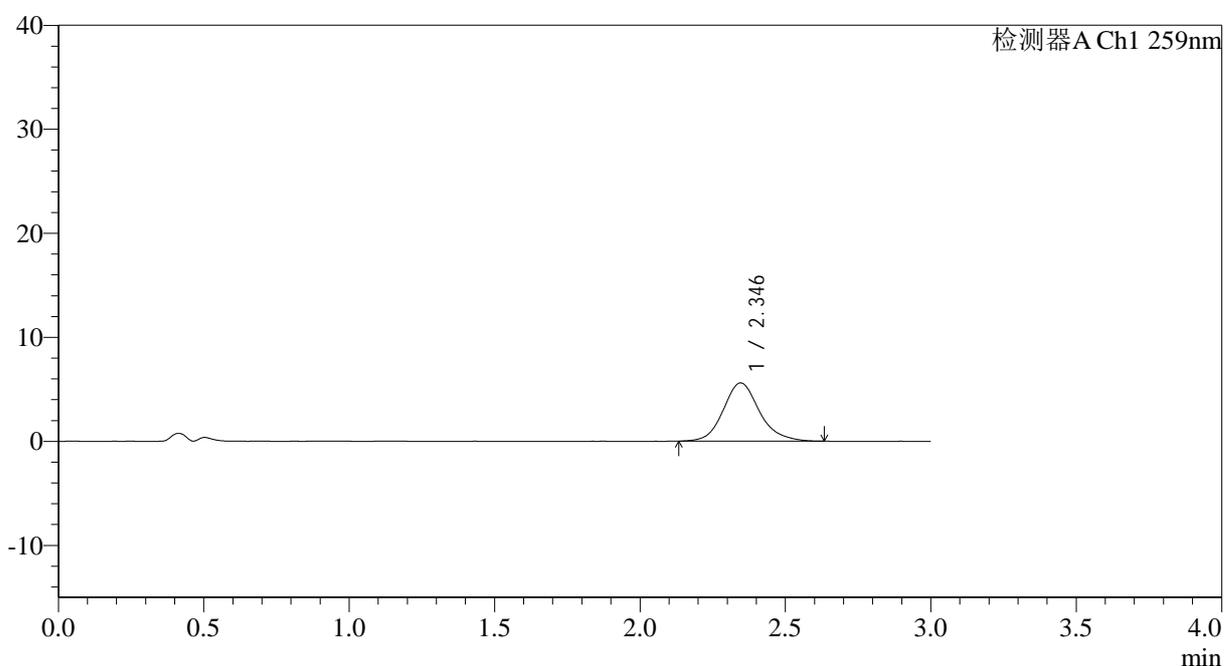

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	48502	100.000	5600	1803	1.145	--
总计		48502	100.000	5600			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1569-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 03:05:48 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:28:11 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

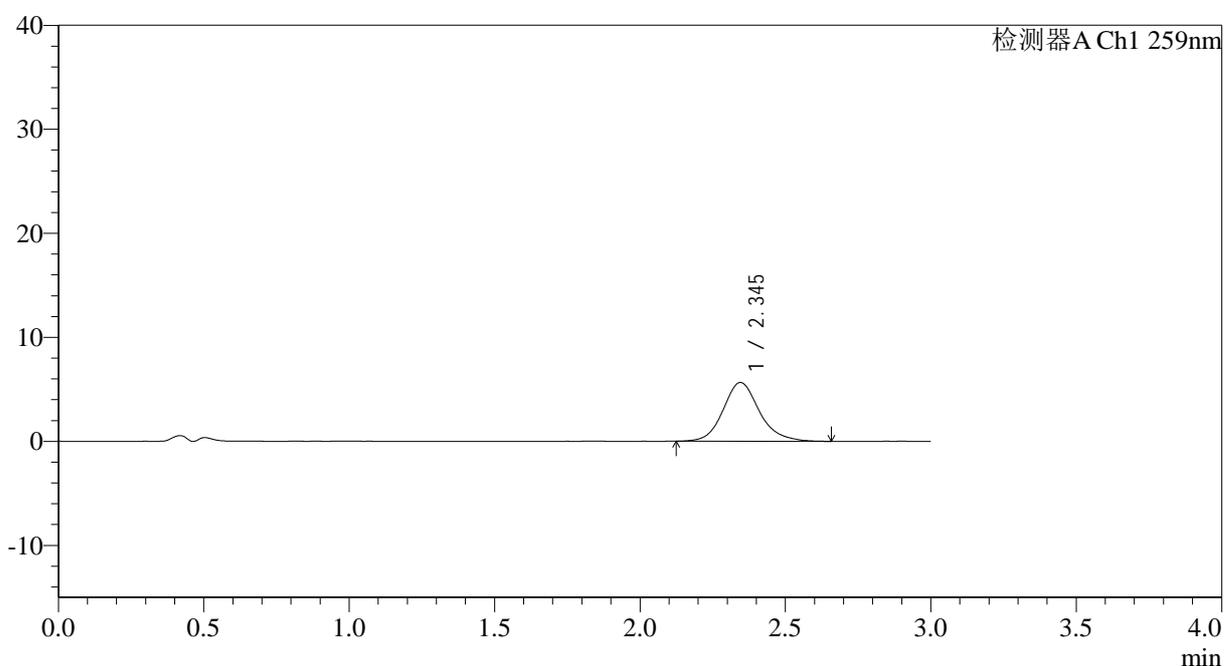

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	49199	100.000	5652	1797	1.152	--
总计		49199	100.000	5652			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1570-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-7
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 03:09:10 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:28:14 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

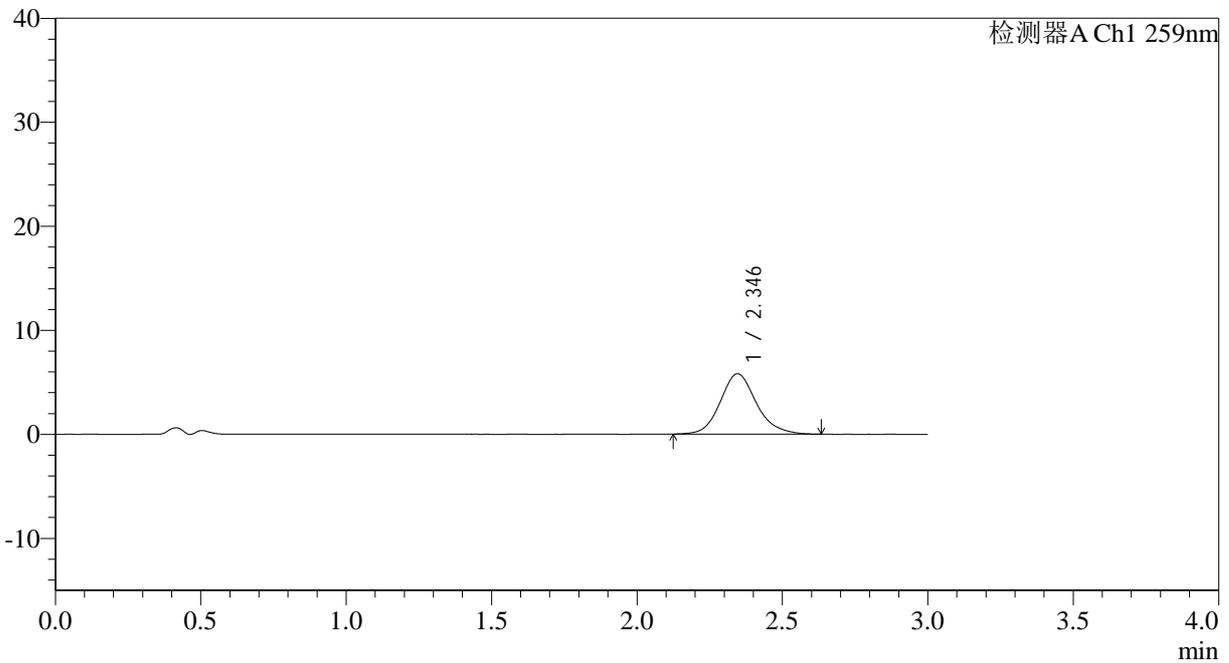

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	50196	100.000	5805	1793	1.142	--
总计		50196	100.000	5805			

图111 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1571-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 03:12:33 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:28:16 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

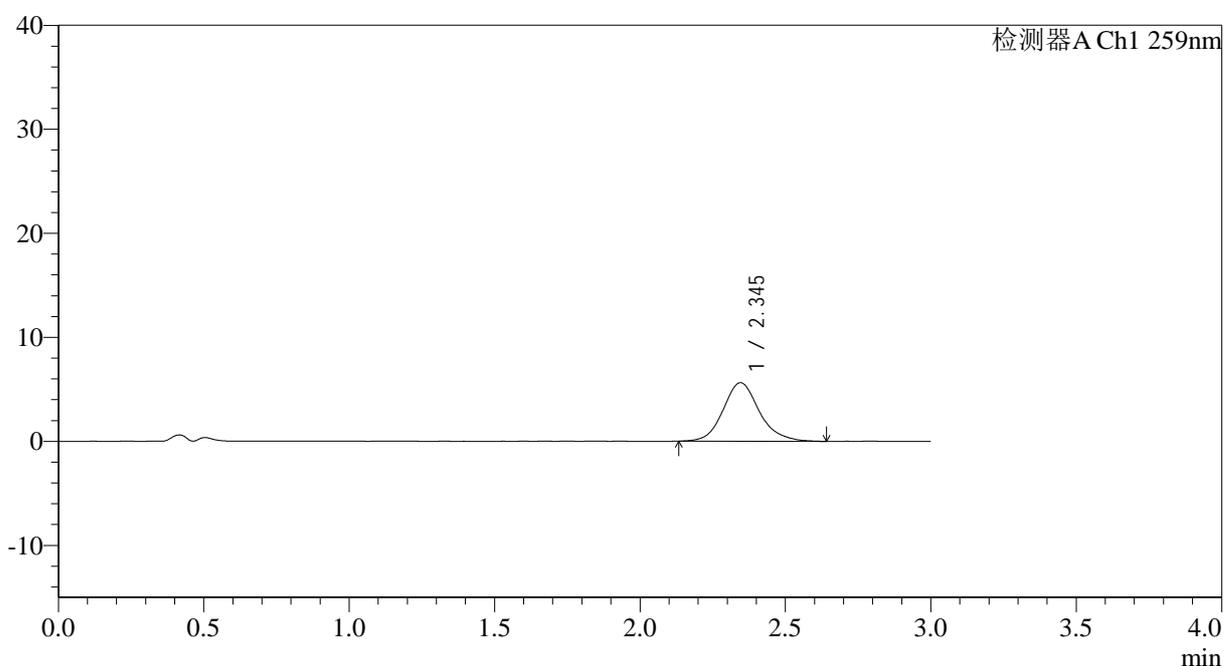

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	48773	100.000	5629	1802	1.139	--
总计		48773	100.000	5629			

图112 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1573-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 03:19:16 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:28:22 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

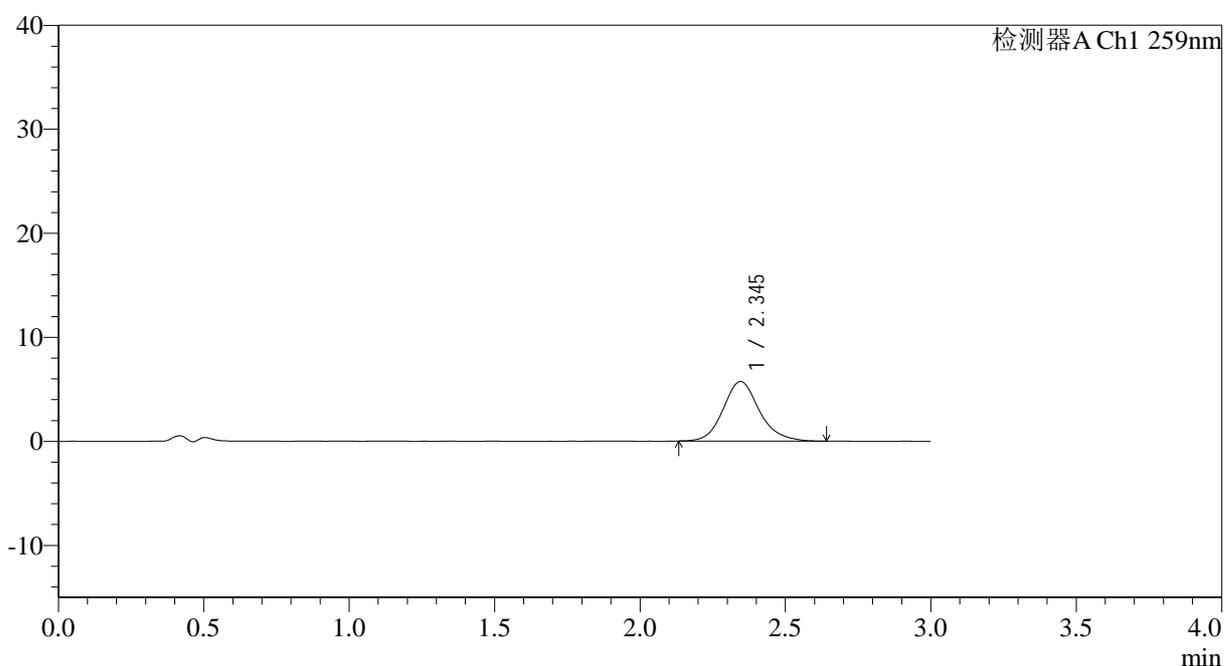

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	49614	100.000	5727	1793	1.150	--
总计		49614	100.000	5727			

图114 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1576-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-8
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 03:29:22 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:28:31 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

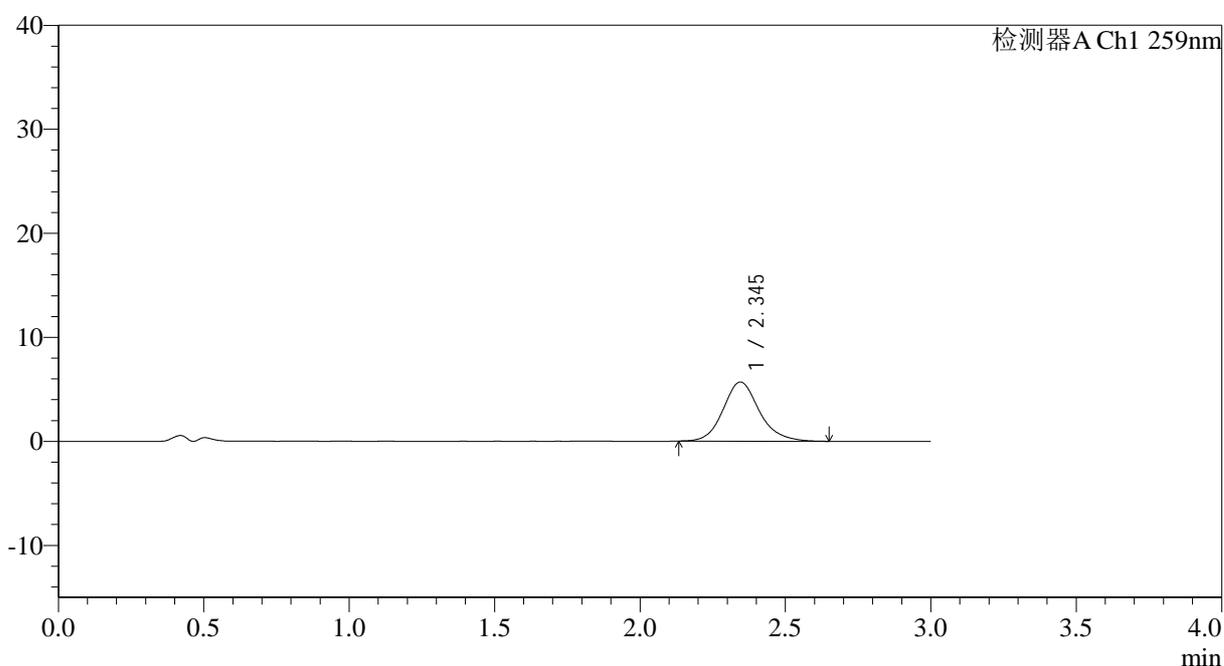

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	49355	100.000	5690	1792	1.148	--
总计		49355	100.000	5690			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1578-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p3-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-26
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 03:36:08 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:28:37 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

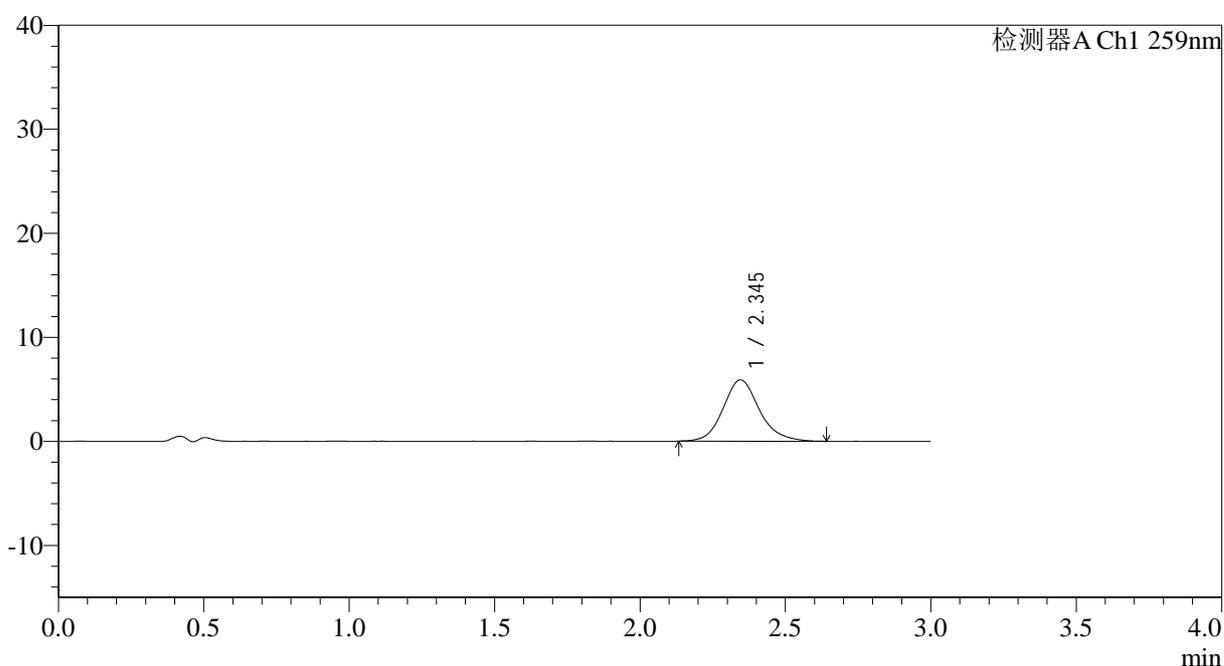

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	51274	100.000	5899	1776	1.146	--
总计		51274	100.000	5899			

图119 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1582-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 03:49:39 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:28:49 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

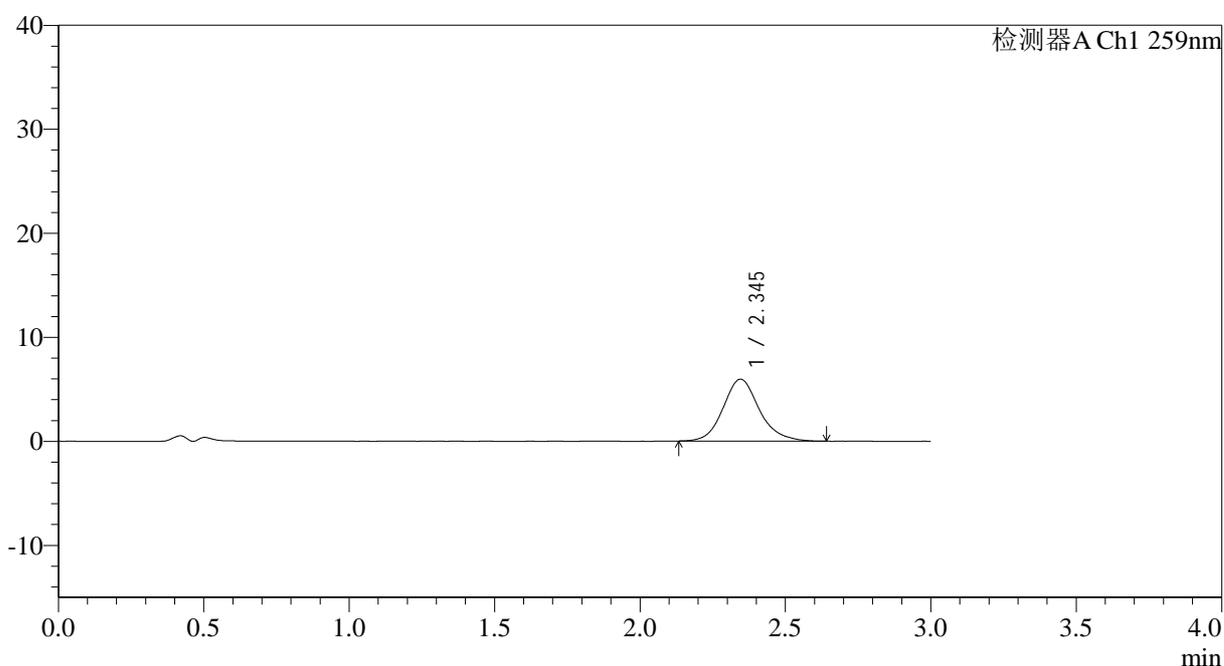

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	51663	100.000	5955	1794	1.146	--
总计		51663	100.000	5955			

图123 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片1

供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1588-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-6
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 04:10:02 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:29:06 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

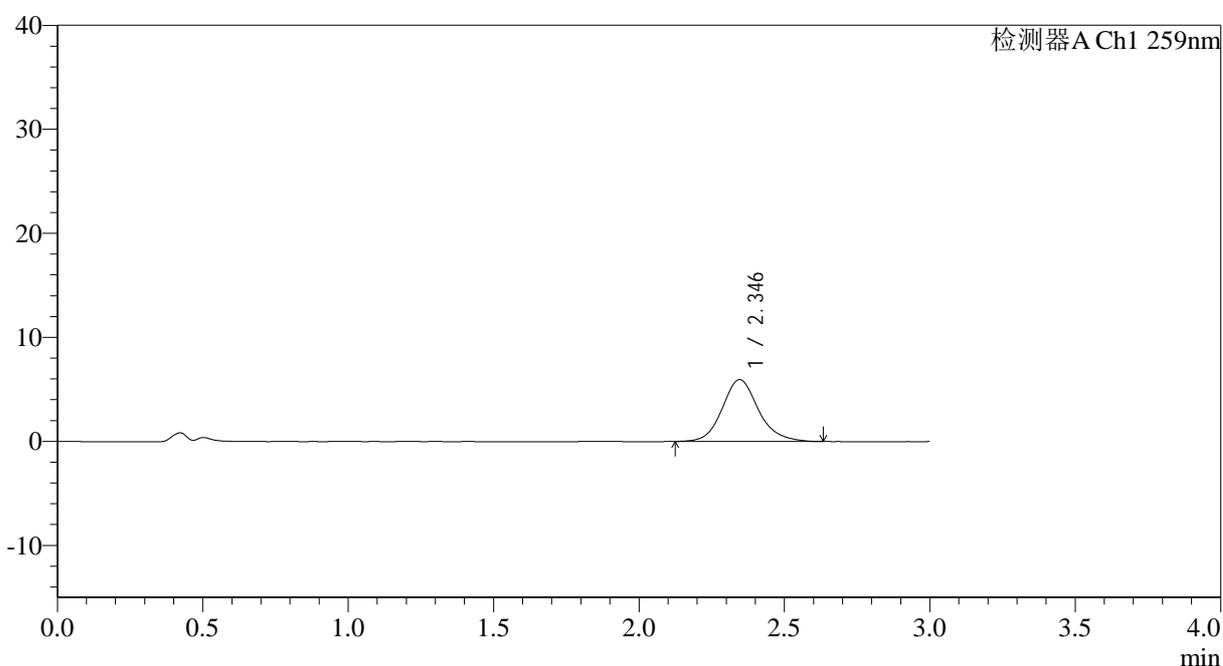

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	51617	100.000	5947	1796	1.142	--
总计		51617	100.000	5947			

图129 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1

供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1589-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-15
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 04:13:26 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:29:08 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

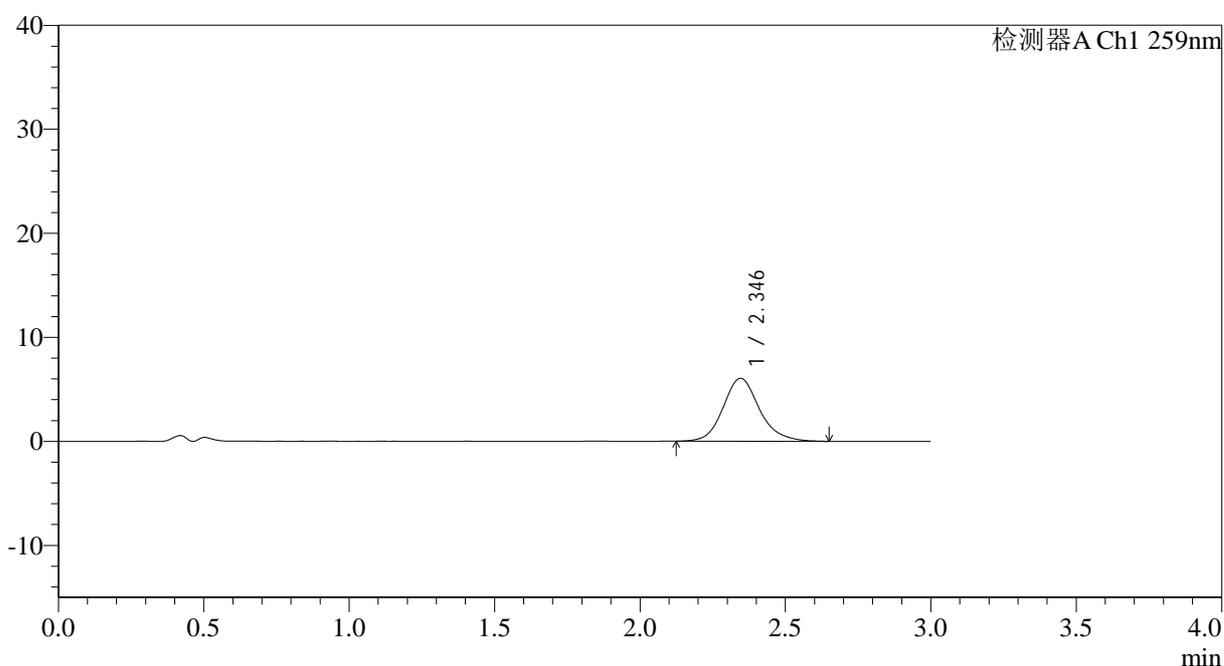

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	52726	100.000	6053	1783	1.148	--
总计		52726	100.000	6053			

图130 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2

供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1591-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-33
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 04:20:14 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:29:14 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

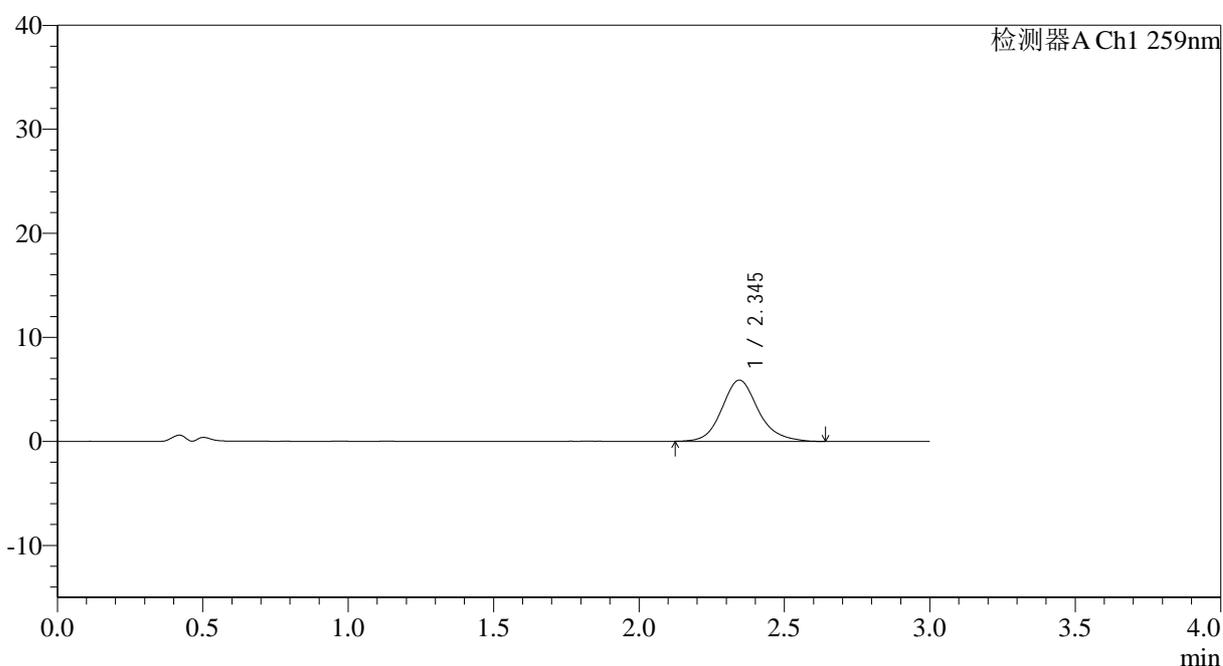

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	51341	100.000	5886	1779	1.152	--
总计		51341	100.000	5886			

图132 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4

供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1592-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 04:23:37 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:29:17 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

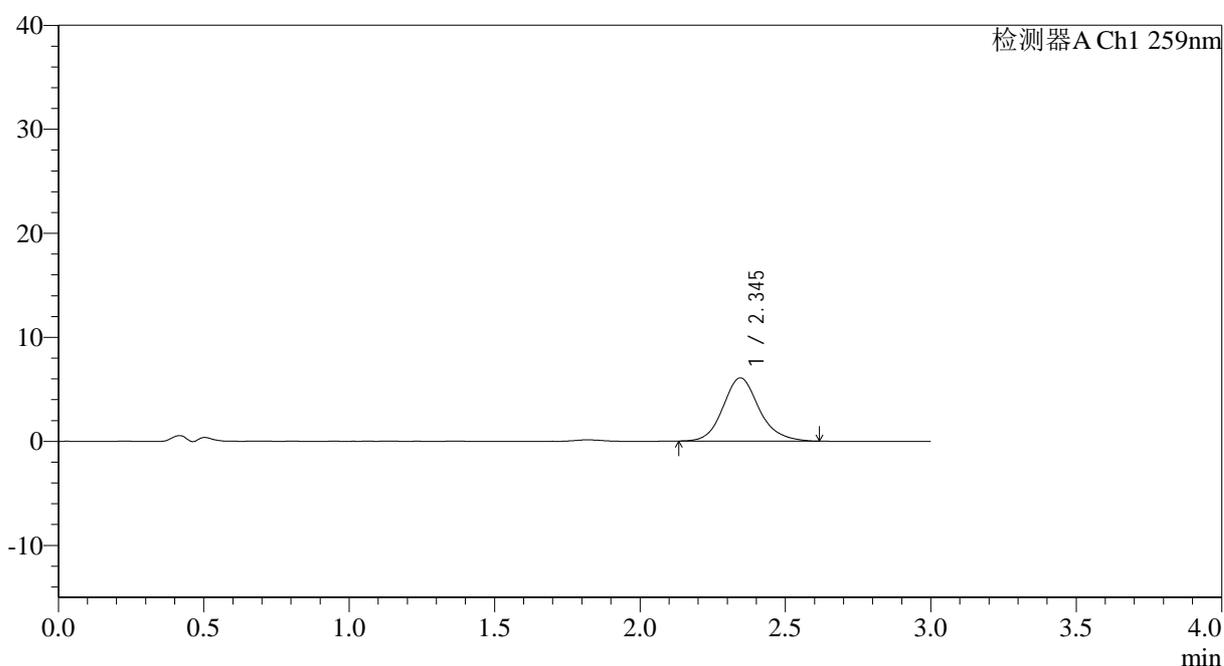

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	52736	100.000	6086	1803	1.143	--
总计		52736	100.000	6086			

图133 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5

供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1593-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-51
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 04:27:01 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:29:20 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

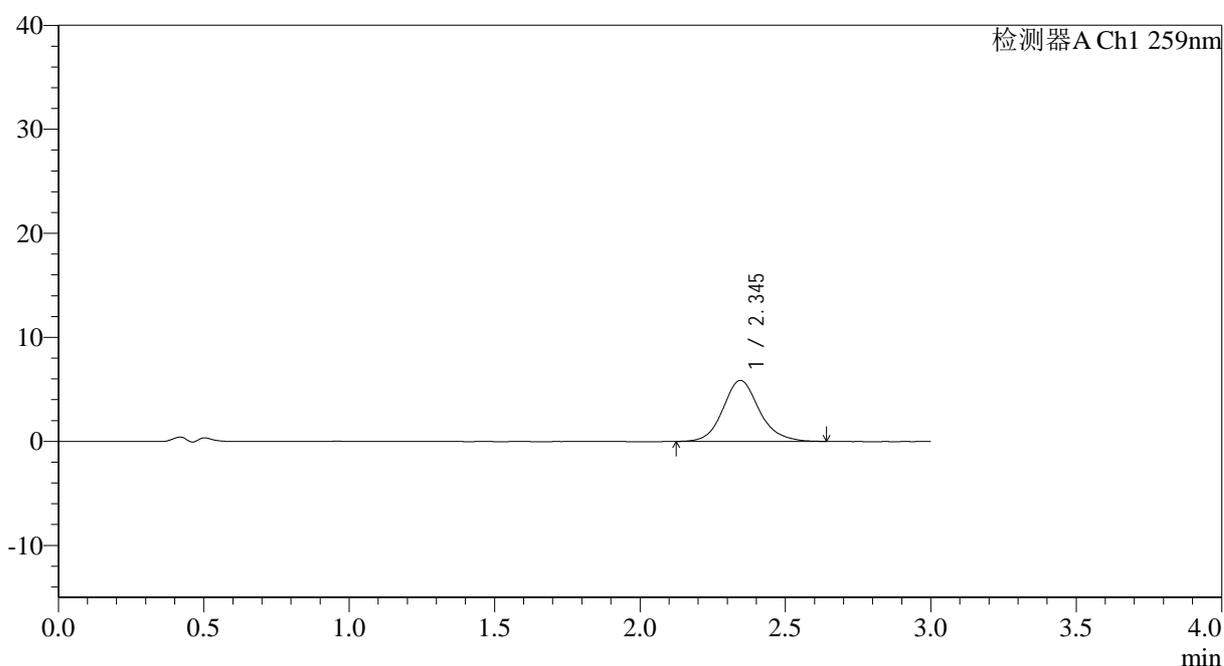

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	50932	100.000	5864	1794	1.135	--
总计		50932	100.000	5864			

图134 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6

供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1594-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 04:30:25 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:29:23 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

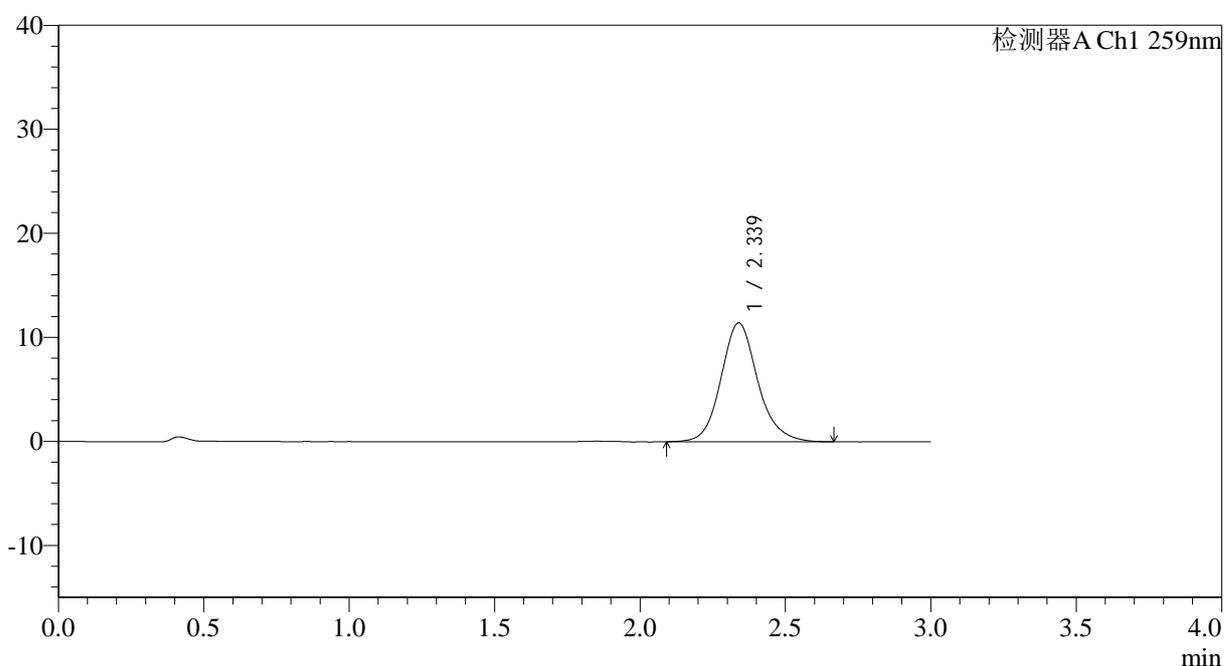

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	100558	100.000	11428	1732	1.140	--
总计		100558	100.000	11428			

图135 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1595-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 04:33:47 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:29:26 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

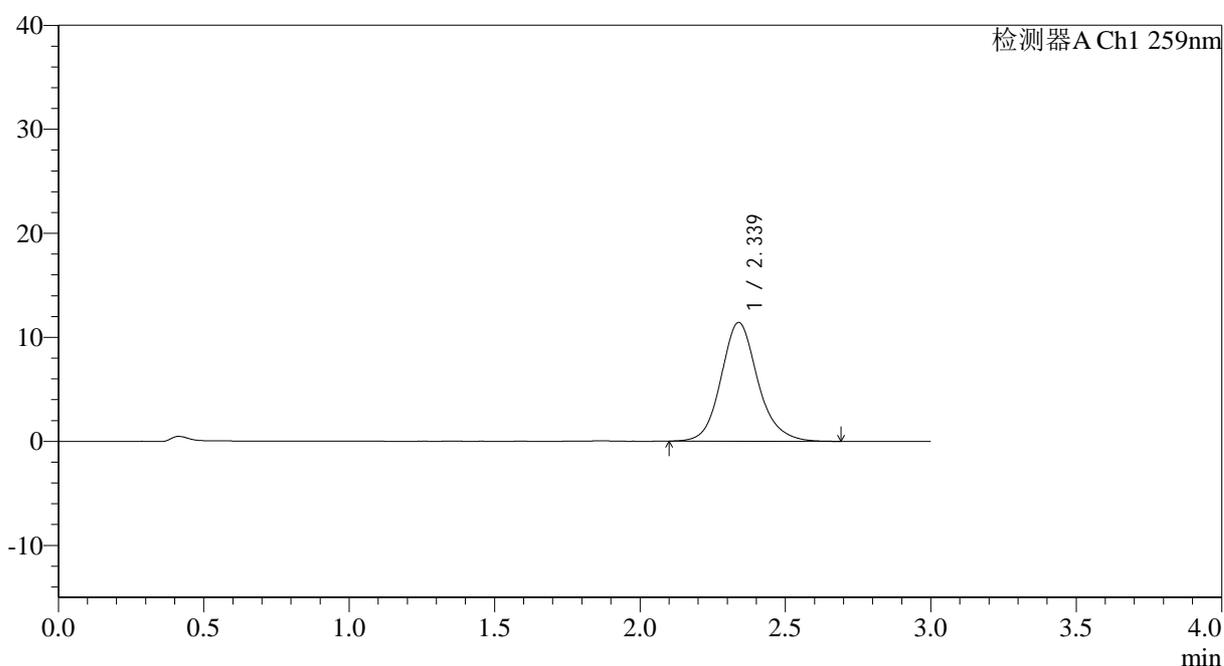

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	100615	100.000	11426	1732	1.140	--
总计		100615	100.000	11426			

图136 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051621批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1597-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 04:40:34 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:29:31 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

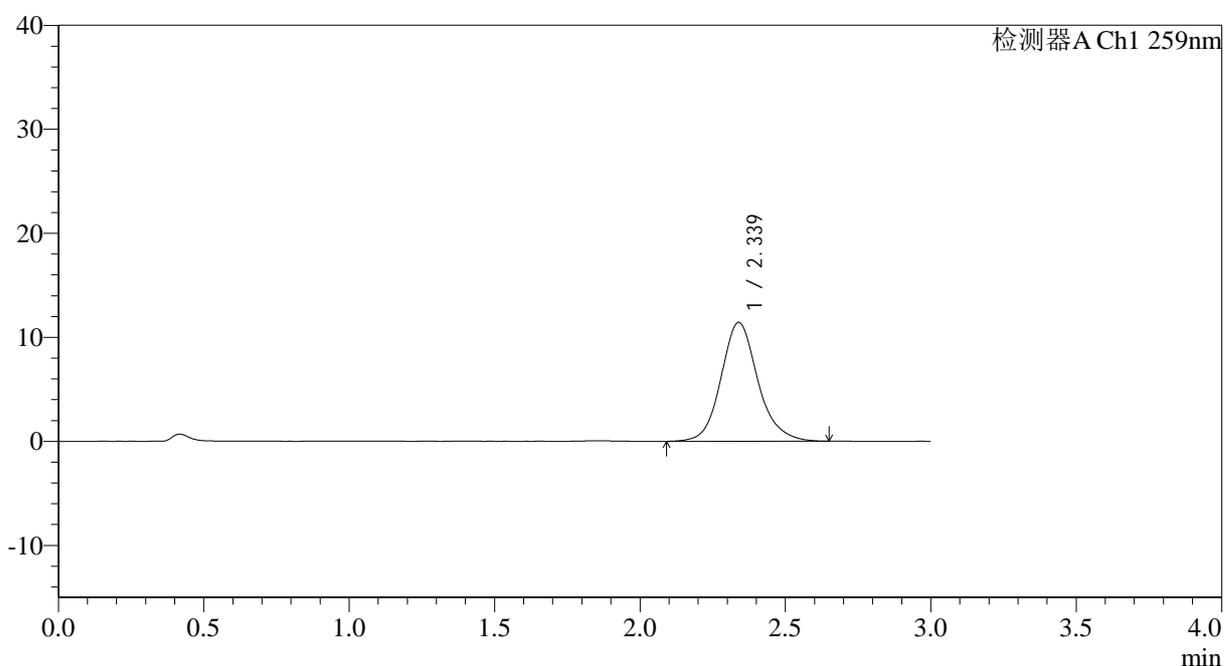

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	100909	100.000	11440	1732	1.135	--
总计		100909	100.000	11440			

图138 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1598-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 04:43:59 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:29:34 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

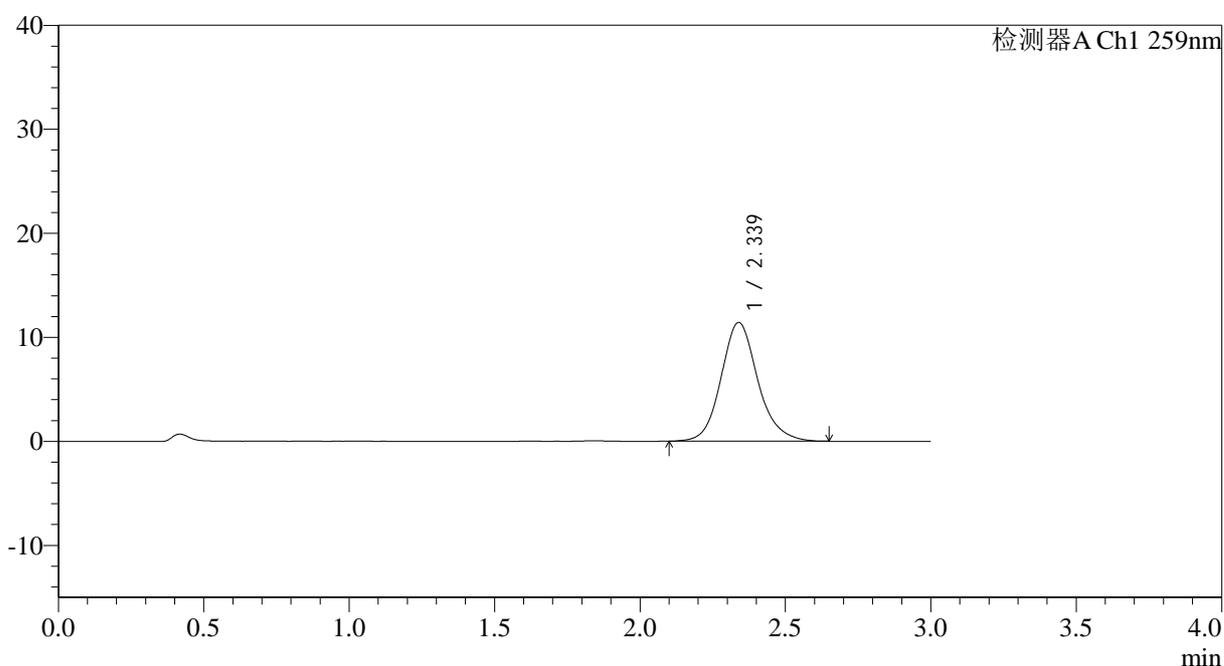

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	100633	100.000	11435	1728	1.139	--
总计		100633	100.000	11435			

图139 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1599-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 04:47:24 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:29:37 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

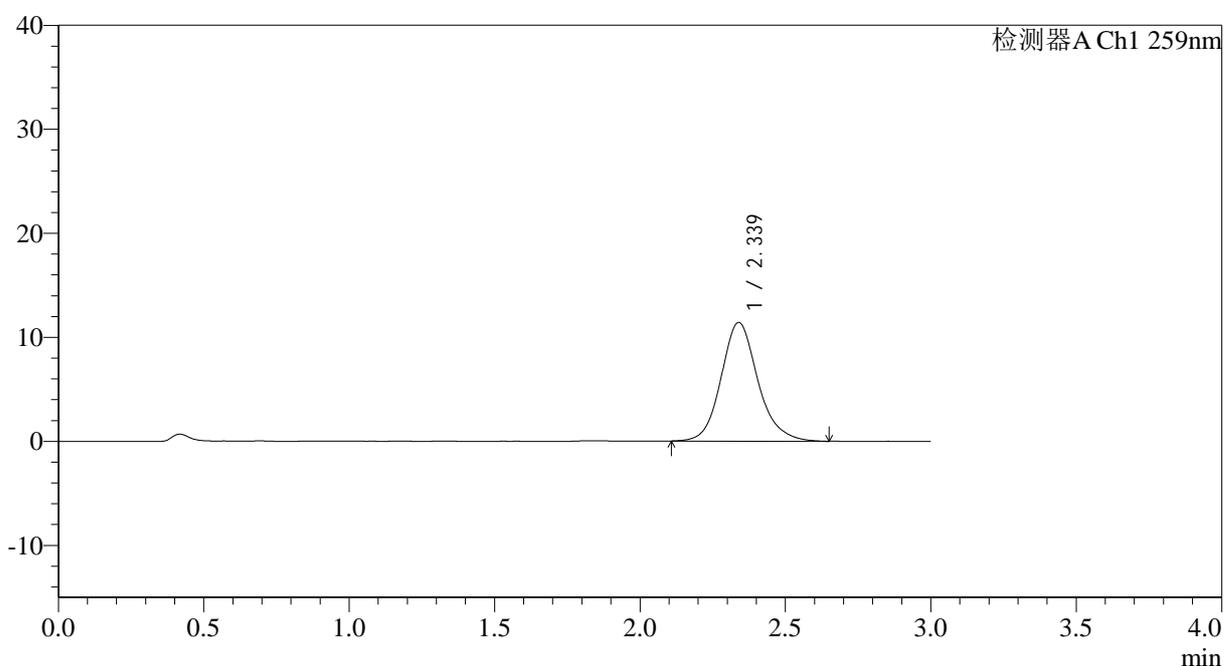

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	100432	100.000	11418	1735	1.144	--
总计		100432	100.000	11418			

图140 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1600-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 04:50:47 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:29:40 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

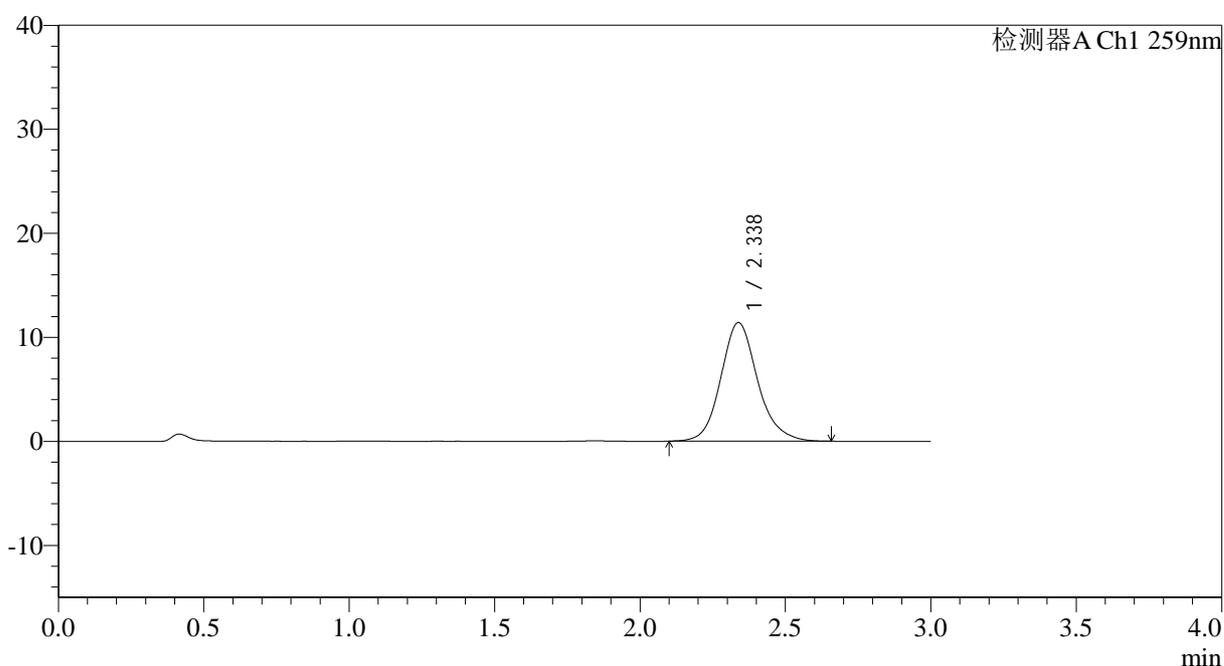

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.338	100327	100.000	11408	1727	1.143	--
总计		100327	100.000	11408			

图141 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1601-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 04:54:09 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:29:43 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

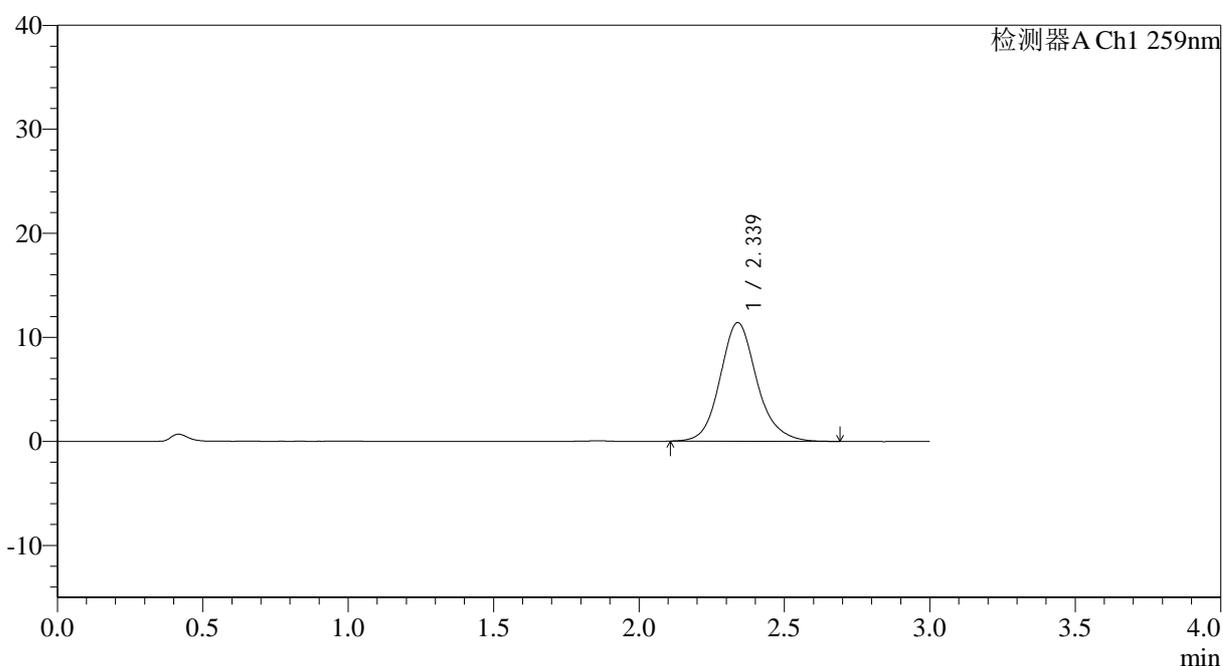

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	100569	100.000	11412	1723	1.142	--
总计		100569	100.000	11412			

图142 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1602-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-1 版本号: 6.115
 进样体积: 20 μl 实验者: liuqihuizi
 进样时间: 2025/07/02 04:57:32 处理者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:29:46
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

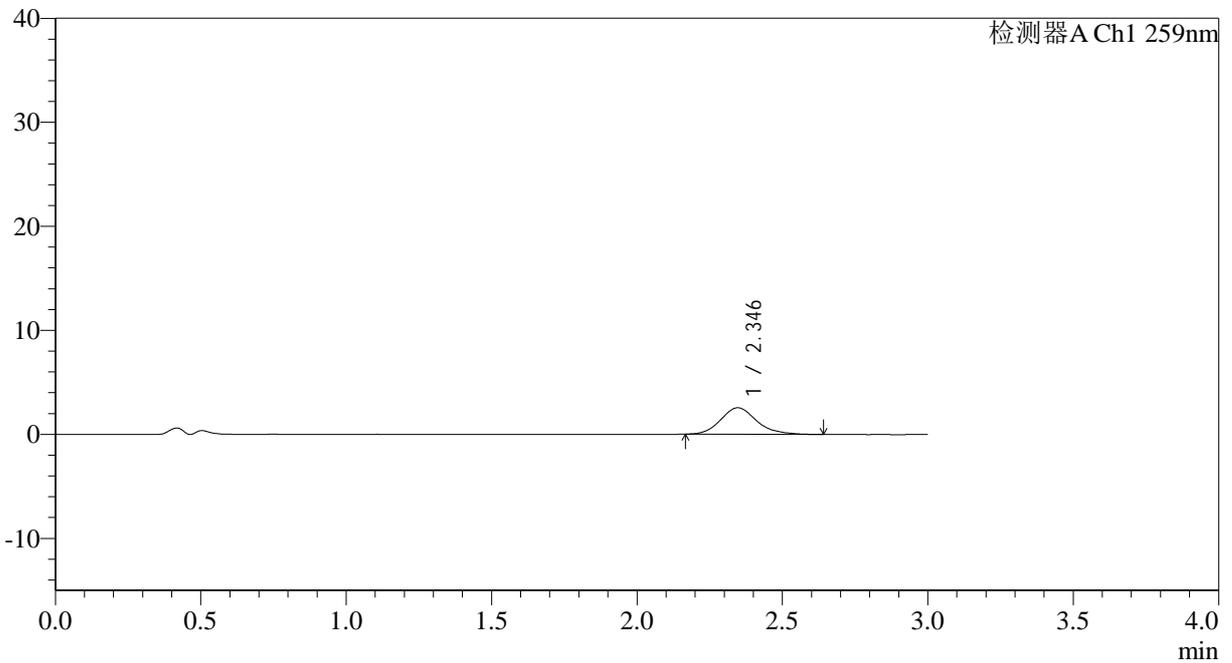

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	22130	100.000	2557	1785	1.183	--
总计		22130	100.000	2557			

图143 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1603-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 05:00:54 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:29:49 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

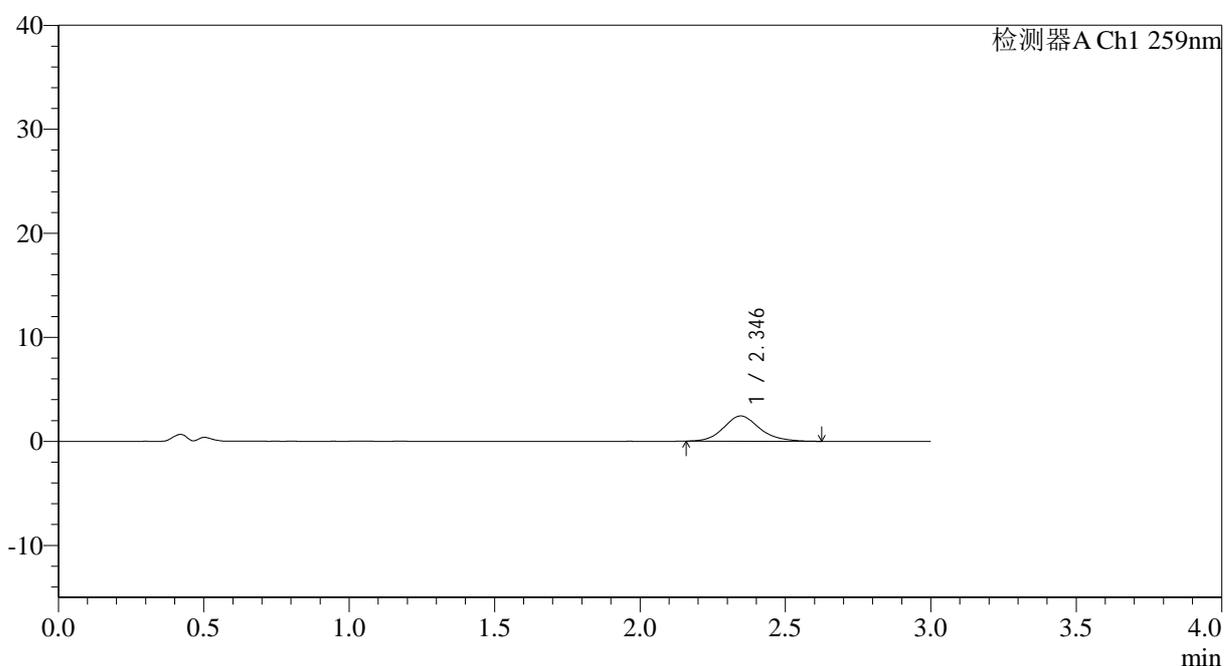

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	20960	100.000	2432	1784	1.154	--
总计		20960	100.000	2432			

图144 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1604-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 05:04:17 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:29:51 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

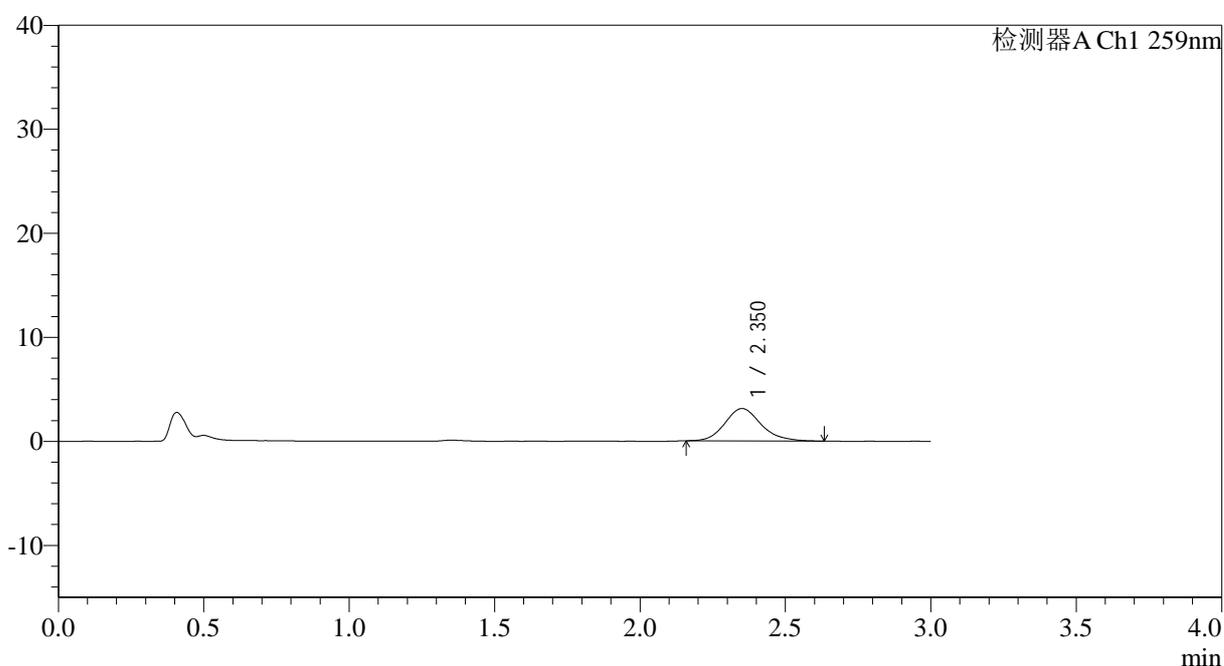

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	26999	100.000	3109	1784	1.172	--
总计		26999	100.000	3109			

图145 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1606-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 05:11:02 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:29:57 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

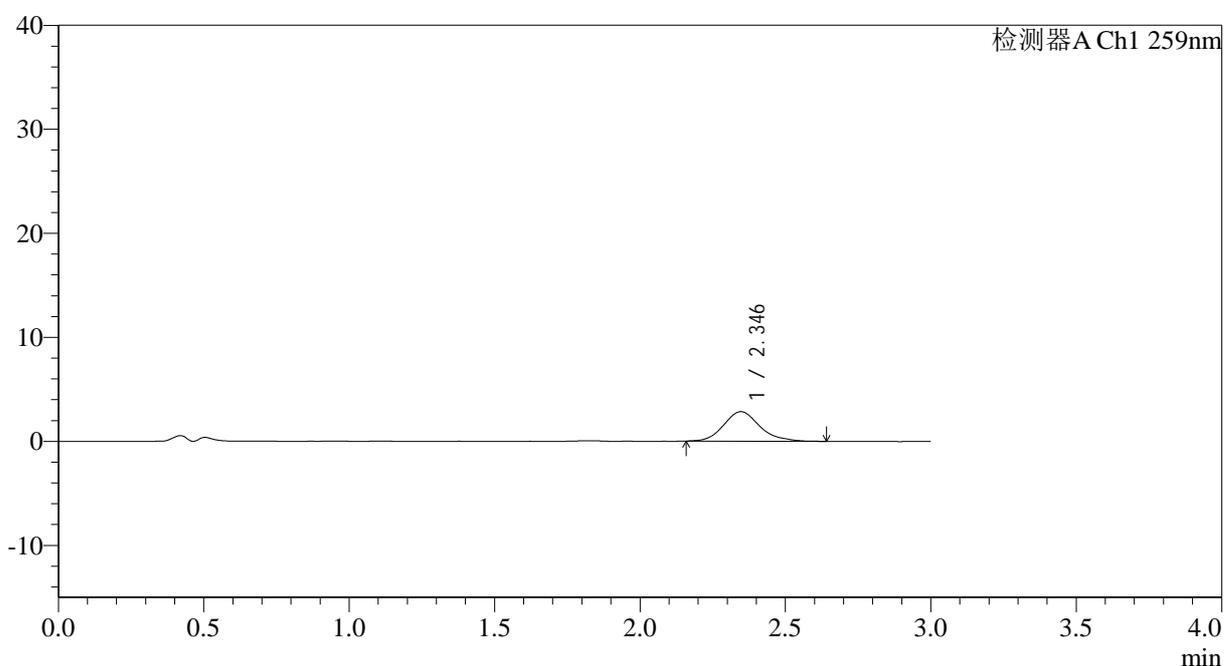

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	24715	100.000	2850	1791	1.175	--
总计		24715	100.000	2850			

图147 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1608-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 05:17:48 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:30:03 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

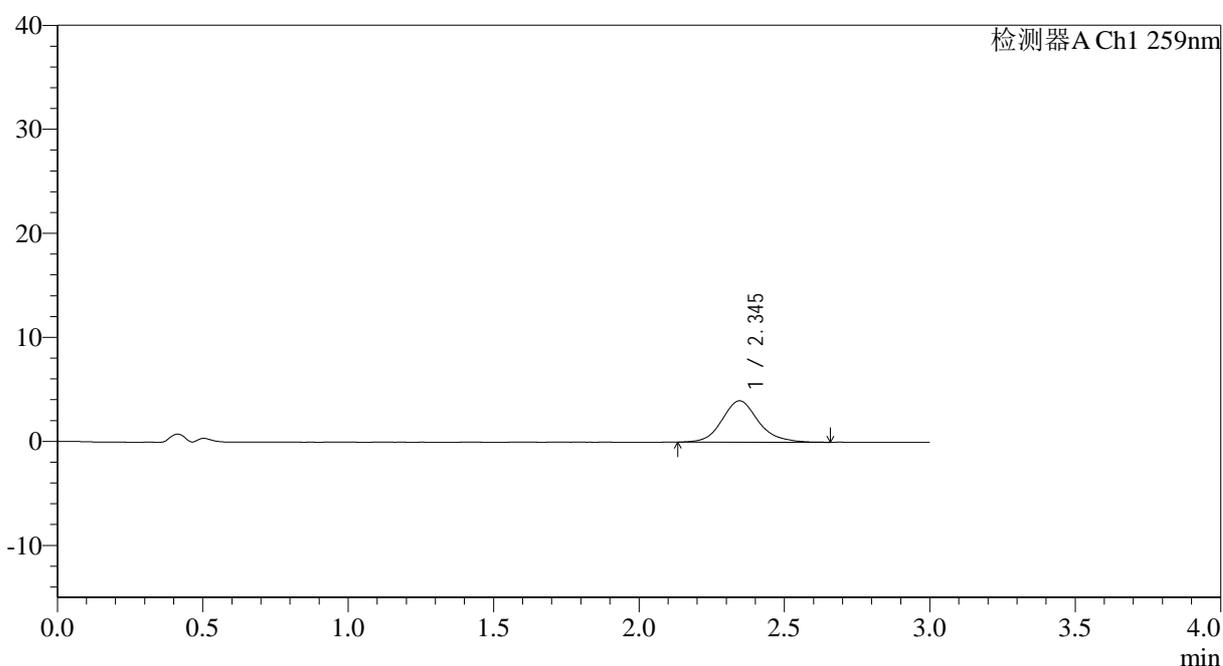

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	34727	100.000	3984	1780	1.149	--
总计		34727	100.000	3984			

图149 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1609-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 05:21:11 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:30:06 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

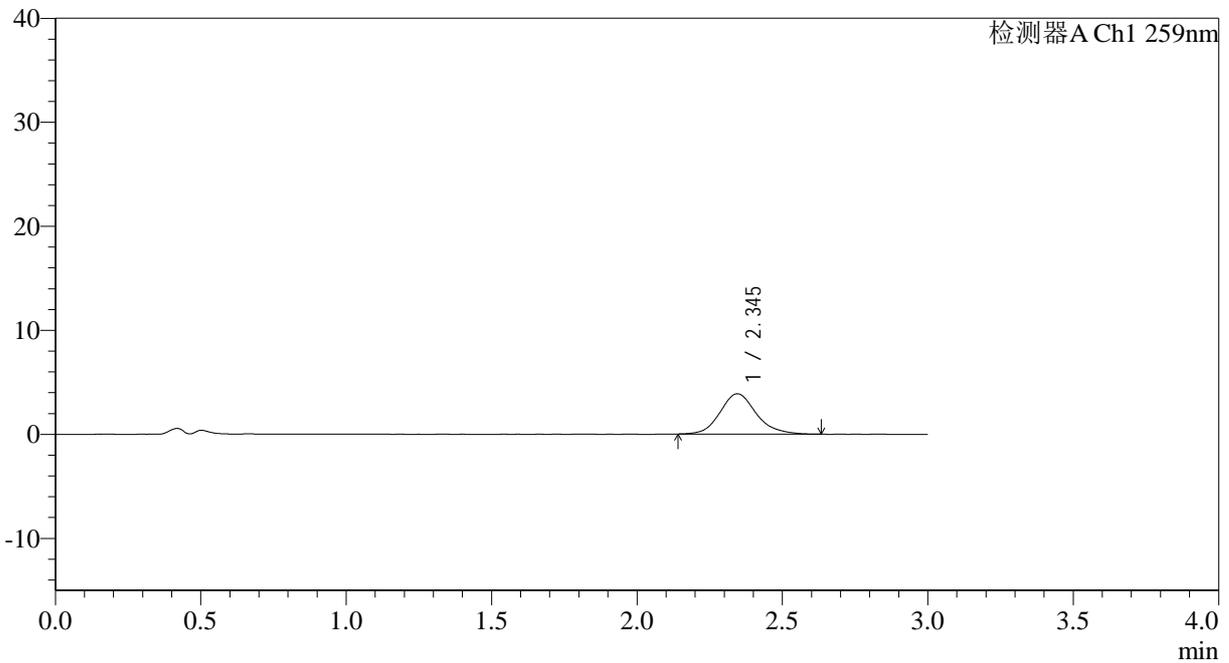

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	33694	100.000	3877	1788	1.153	--
总计		33694	100.000	3877			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1611-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 05:27:55 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:30:12 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

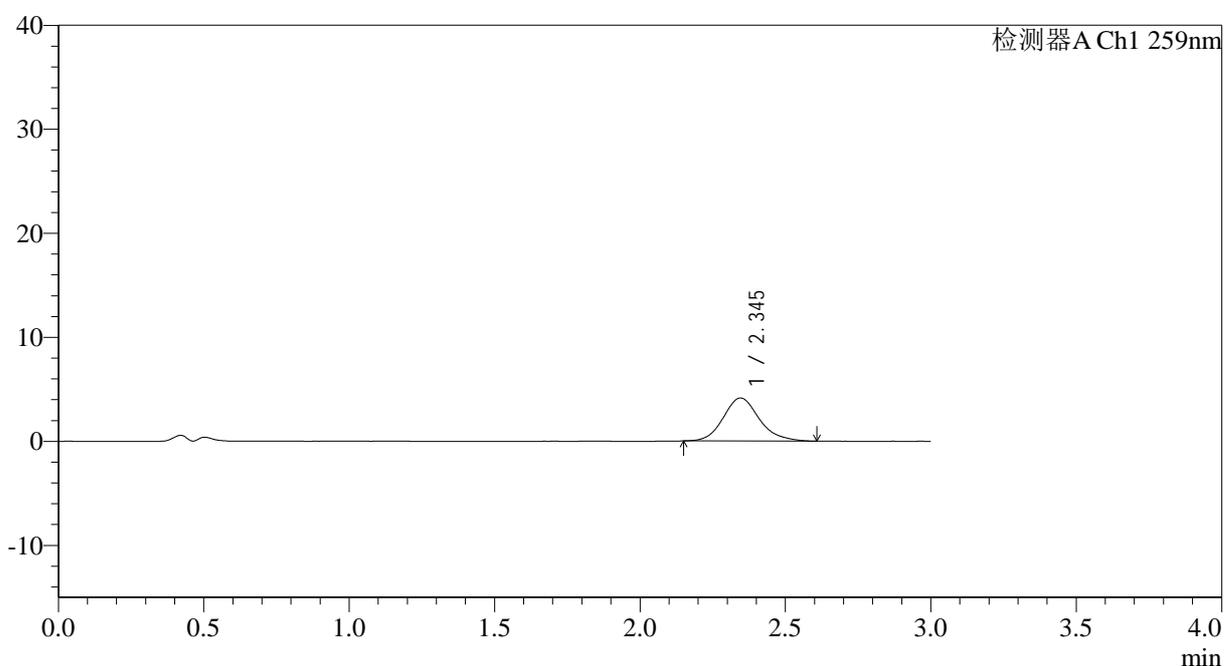

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	35694	100.000	4141	1789	1.151	--
总计		35694	100.000	4141			

图152 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1612-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 05:31:18 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:30:15 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

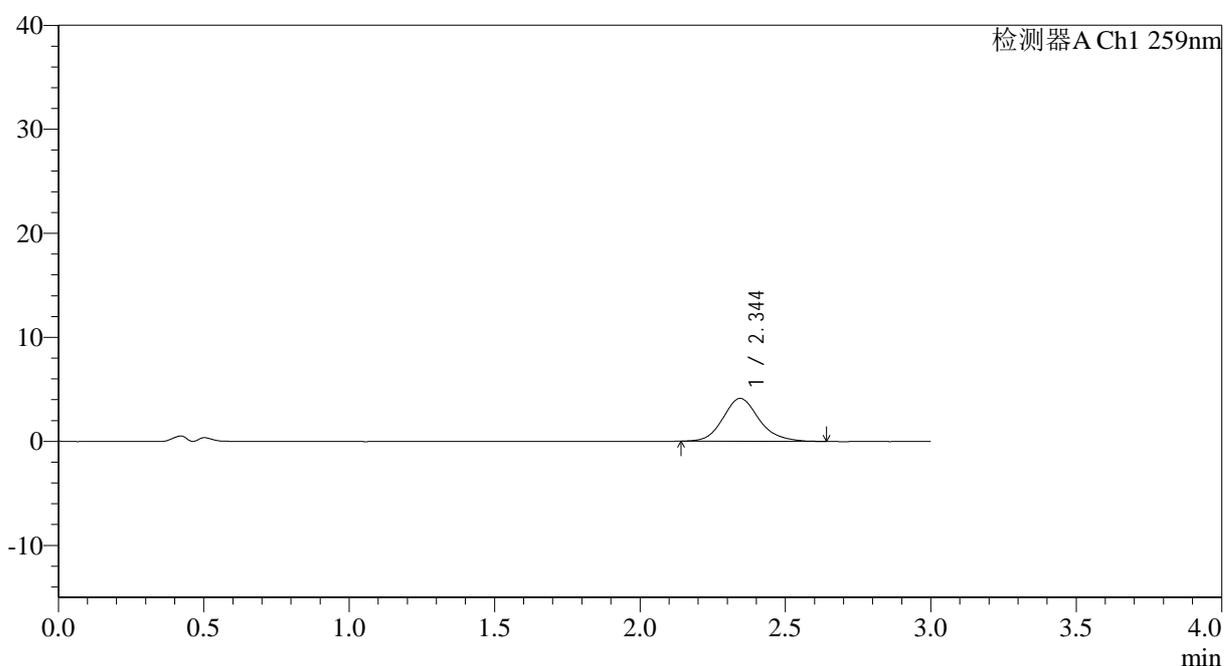

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.344	35781	100.000	4124	1780	1.161	--
总计		35781	100.000	4124			

图153 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1613-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 05:34:41 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:30:18 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

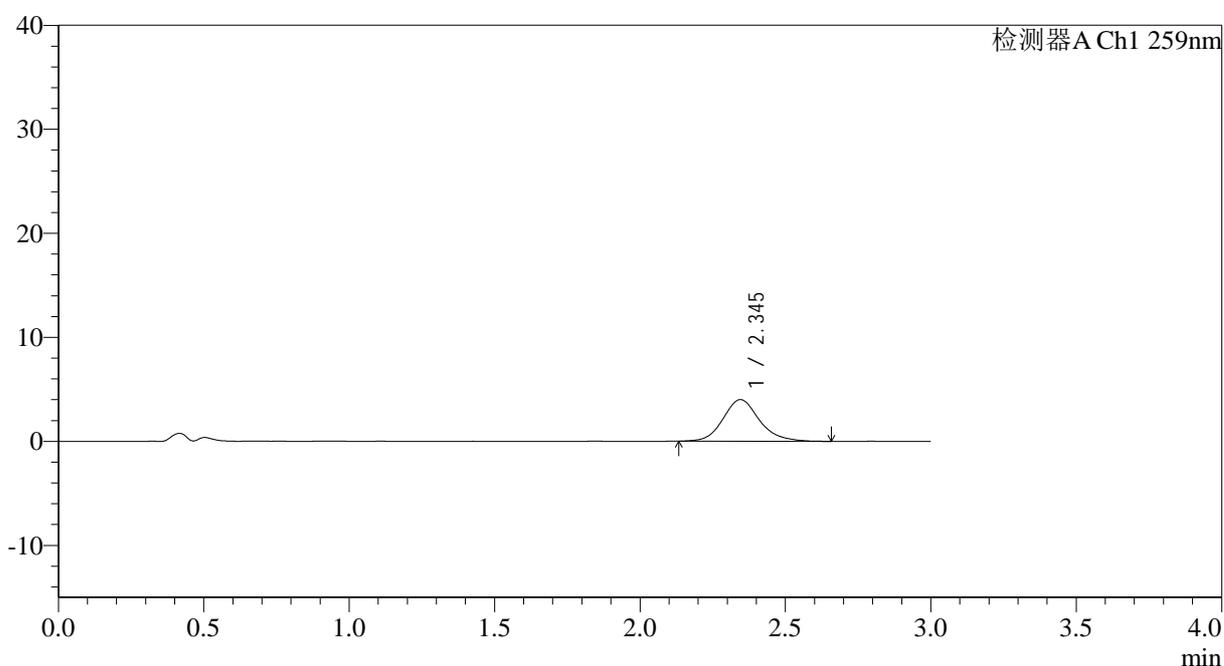

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	35136	100.000	4007	1787	1.156	--
总计		35136	100.000	4007			

图154 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1614-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 05:38:04 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:30:21 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

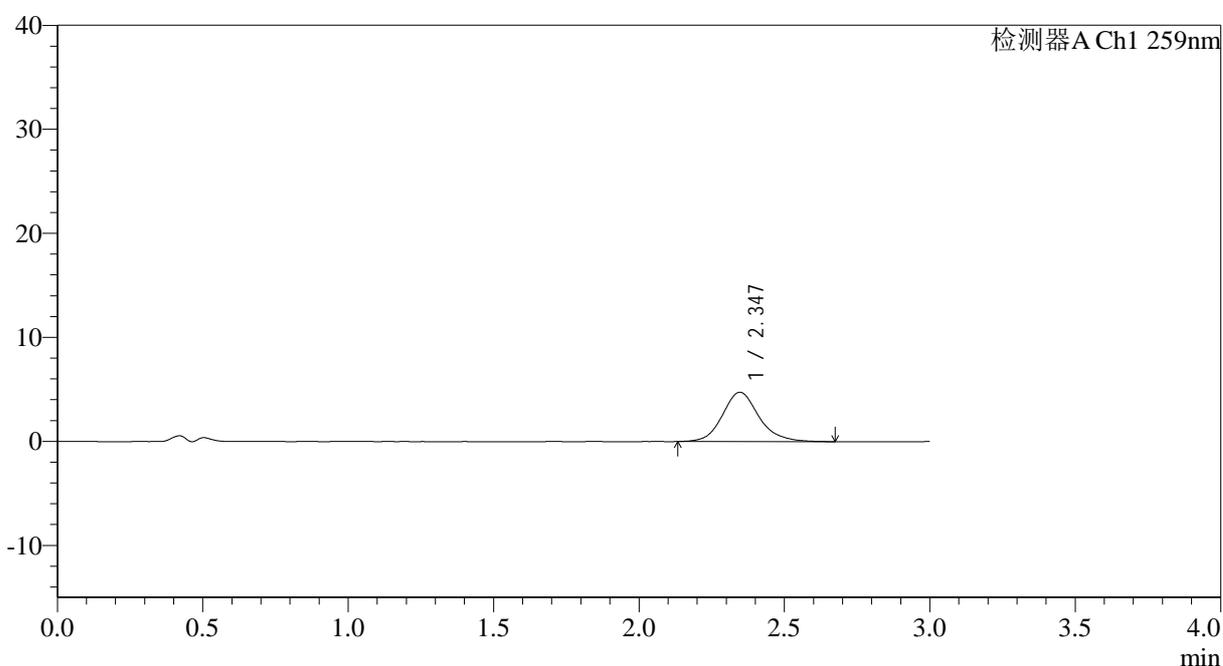

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	41631	100.000	4747	1778	1.149	--
总计		41631	100.000	4747			

图155 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1616-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 05:44:50 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:30:27 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

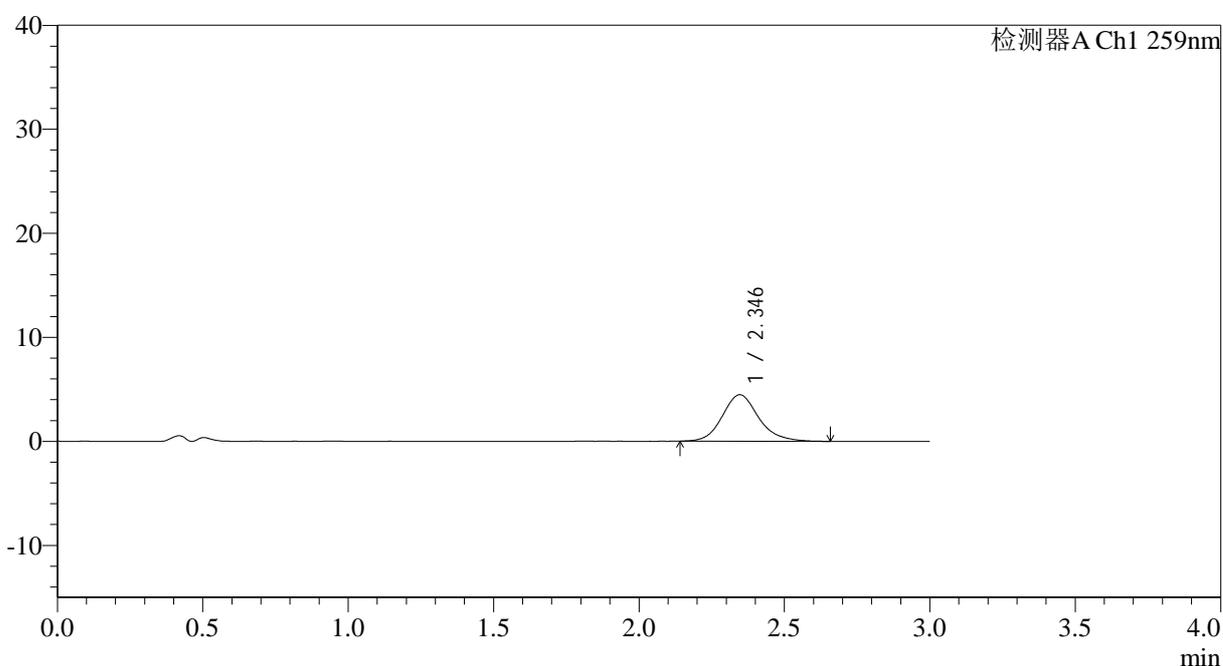

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	38809	100.000	4469	1792	1.155	--
总计		38809	100.000	4469			

图157 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1617-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 05:48:12 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:30:29 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

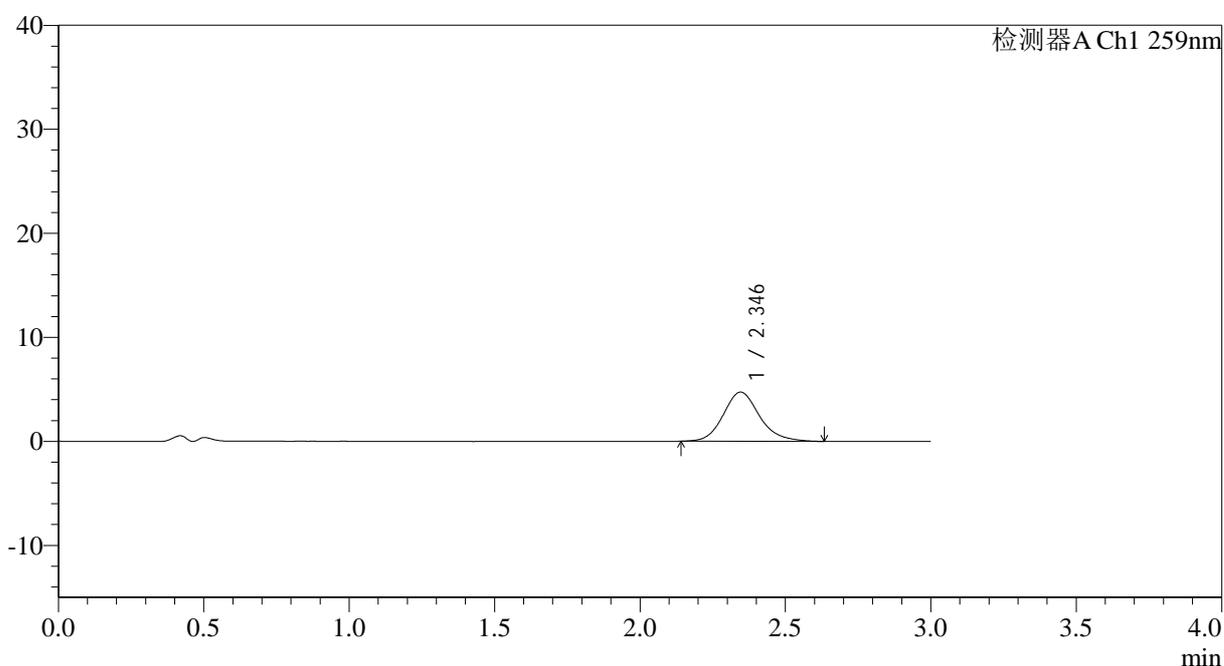

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	41075	100.000	4730	1768	1.157	--
总计		41075	100.000	4730			

图158 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1618-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 05:51:36 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:30:32 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

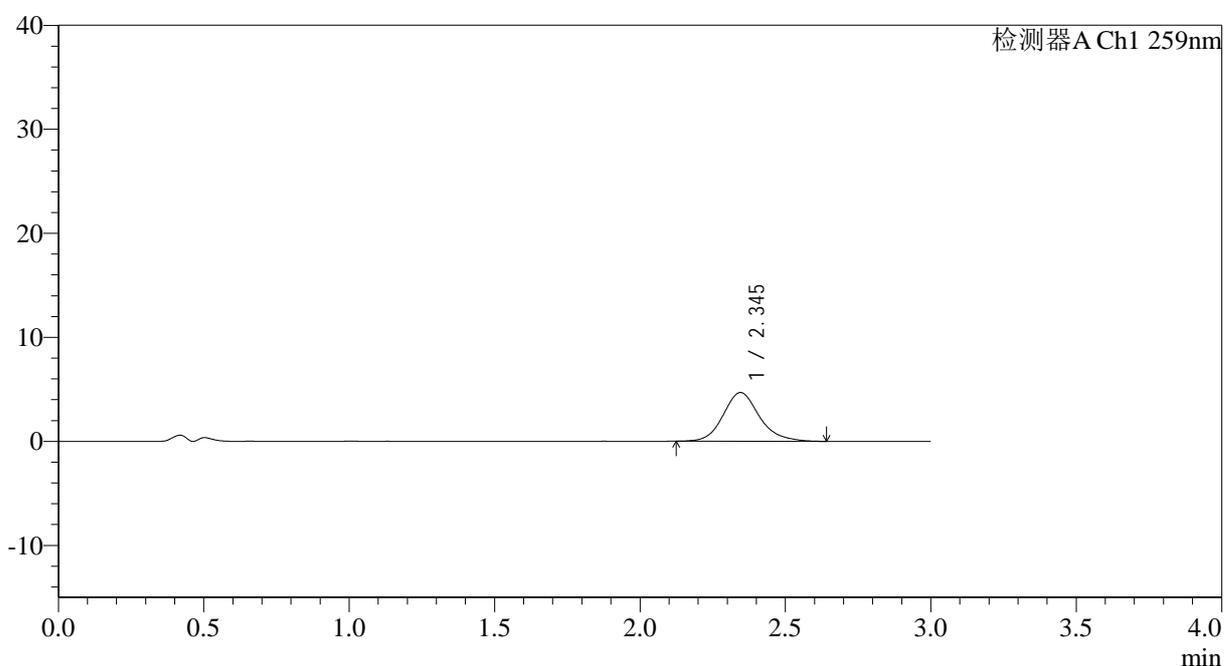

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	40729	100.000	4692	1790	1.155	--
总计		40729	100.000	4692			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1619-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 05:54:58 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:30:35 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

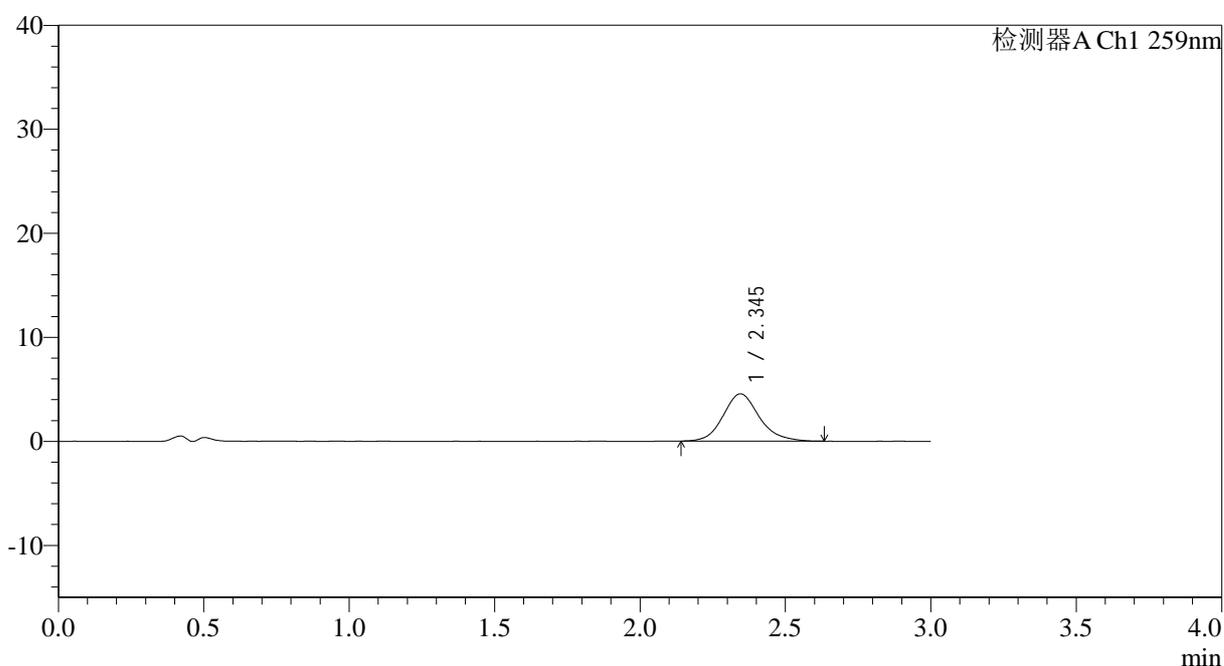

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	39448	100.000	4547	1780	1.151	--
总计		39448	100.000	4547			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1620-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 05:58:20 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:30:38 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

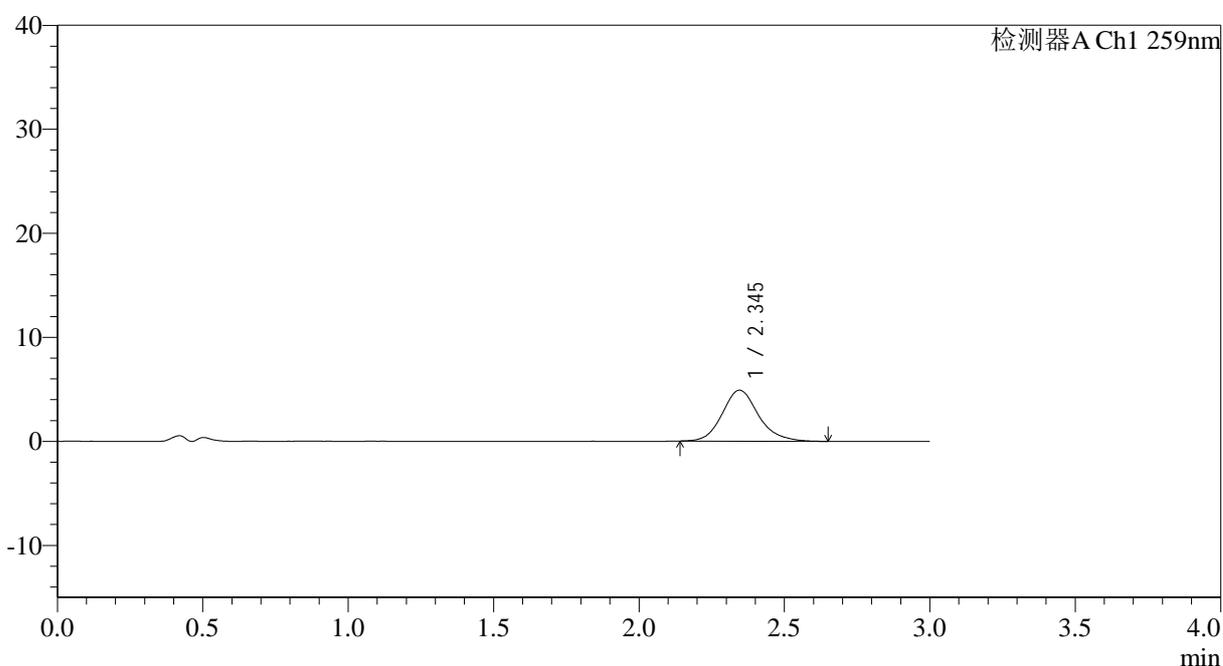

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	42628	100.000	4905	1789	1.156	--
总计		42628	100.000	4905			

图161 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1621-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 06:01:43 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:30:41 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

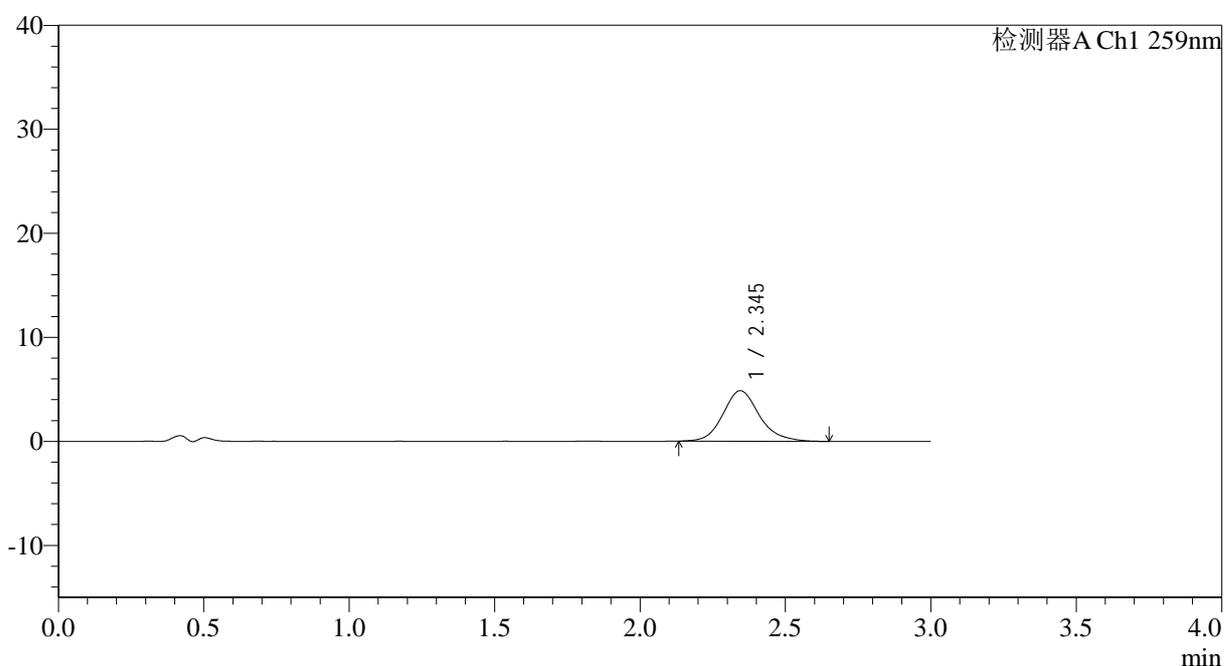

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	42419	100.000	4861	1774	1.153	--
总计		42419	100.000	4861			

图162 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-
 片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1622-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 06:05:07 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:30:44 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

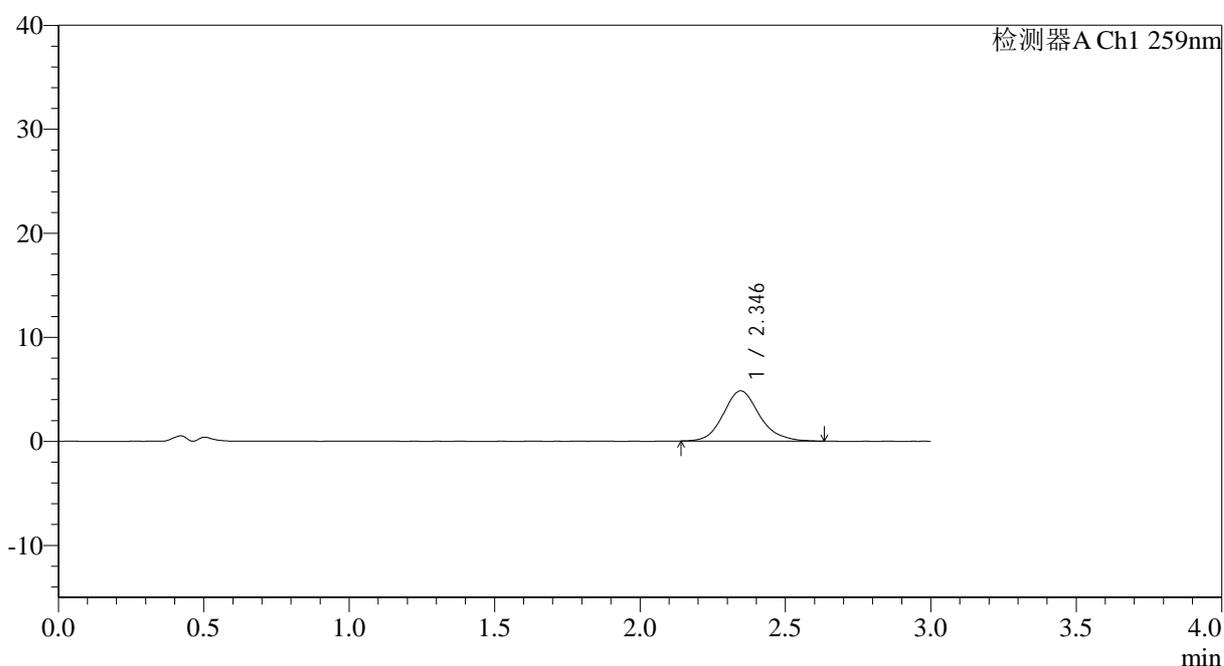

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	41857	100.000	4829	1780	1.146	--
总计		41857	100.000	4829			

图163 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1623-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 06:08:29 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:30:46 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

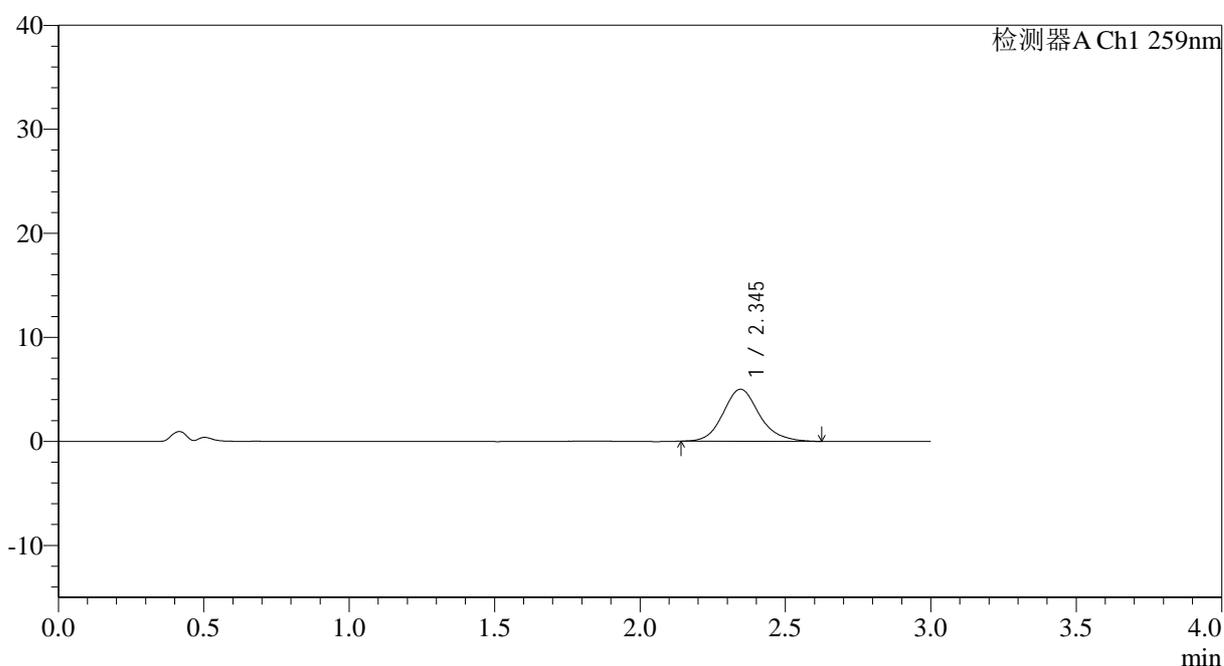

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	43501	100.000	5006	1776	1.145	--
总计		43501	100.000	5006			

图164 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1624-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 06:11:53 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:30:49 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

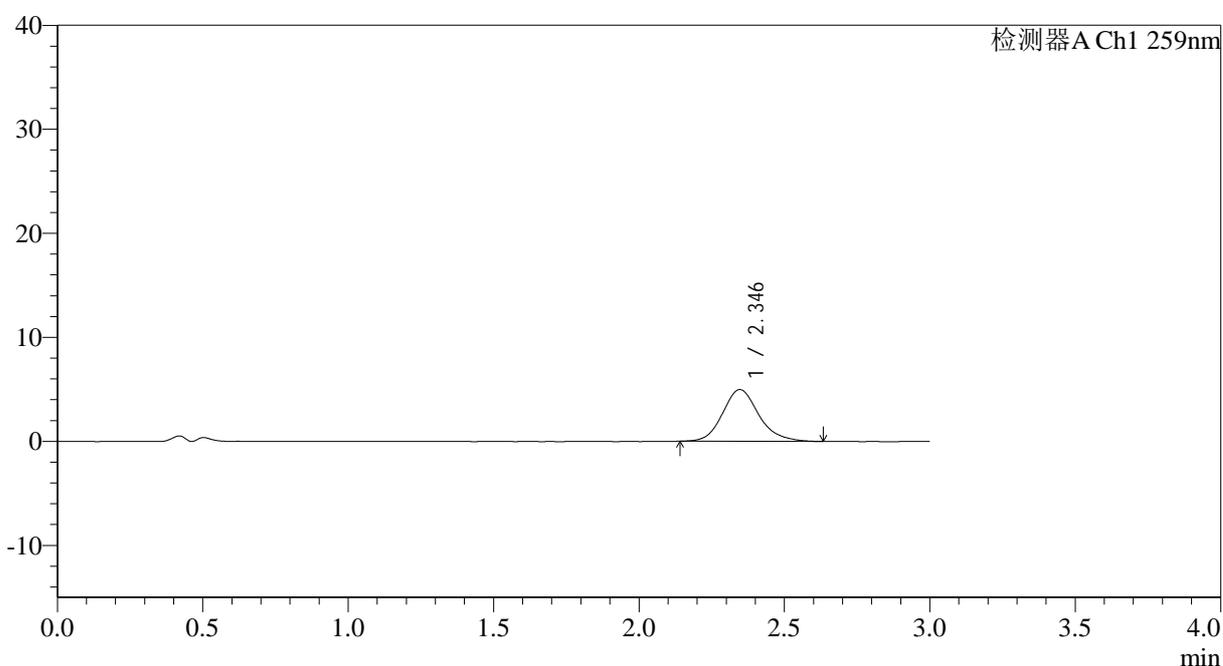

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	43193	100.000	4978	1784	1.166	--
总计		43193	100.000	4978			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1625-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 06:15:15 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:30:52 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

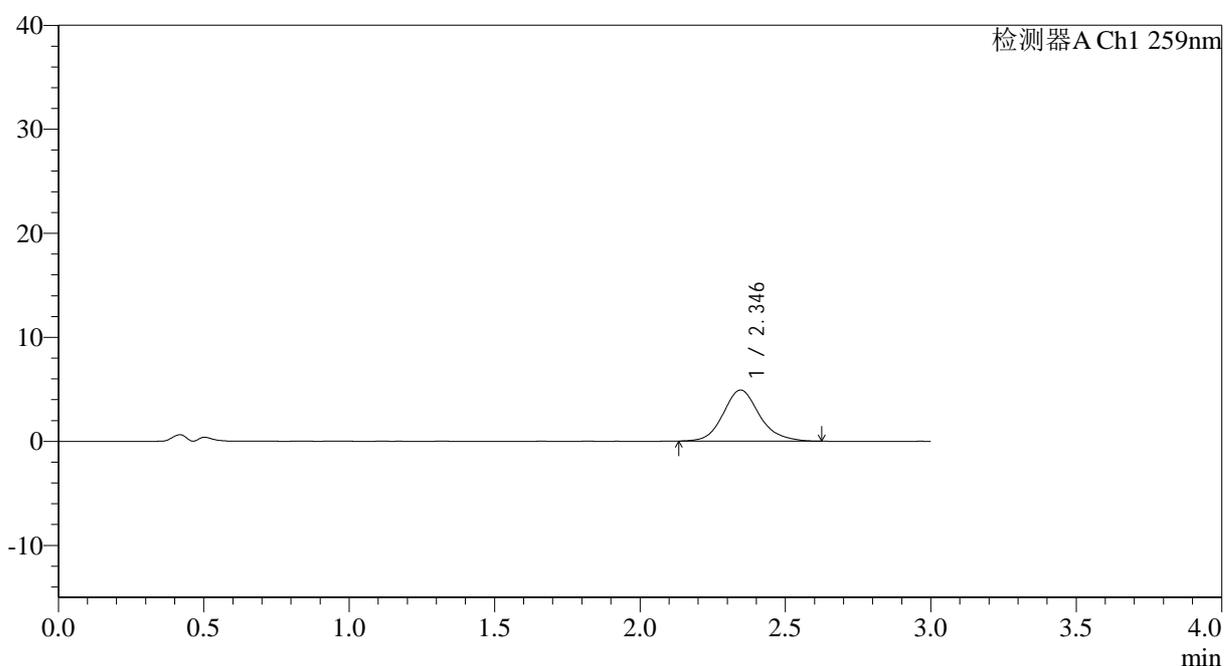

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	42729	100.000	4919	1779	1.149	--
总计		42729	100.000	4919			

图166 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1629-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 06:28:46 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:31:04 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

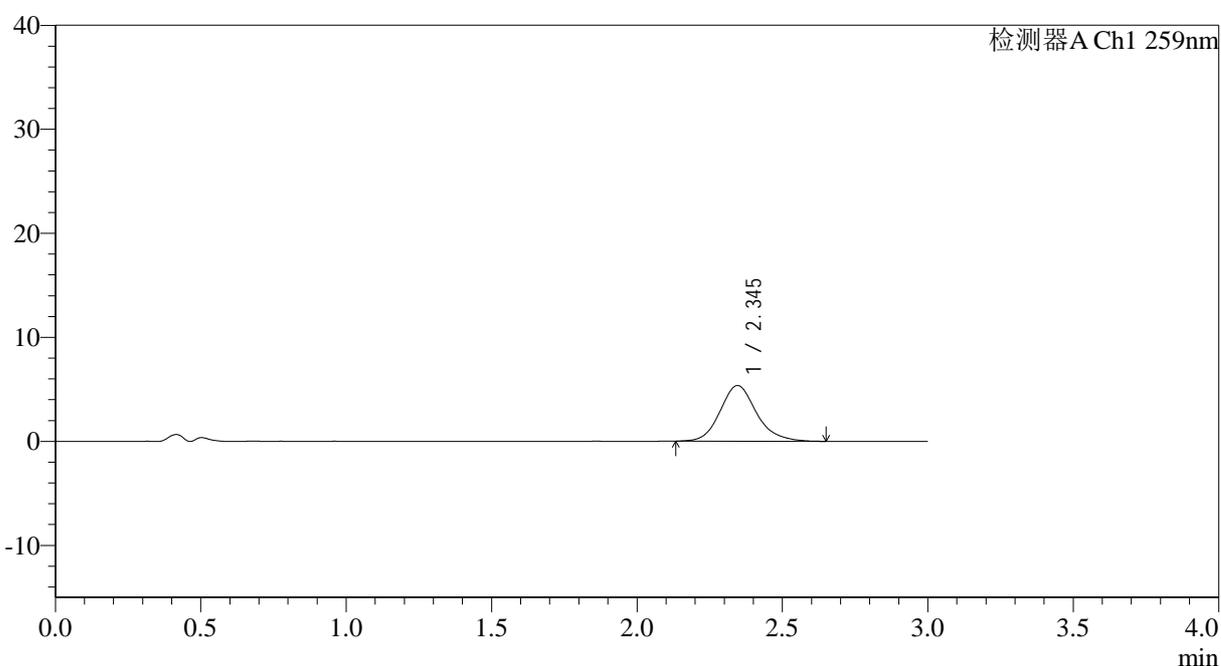

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	46704	100.000	5358	1764	1.153	--
总计		46704	100.000	5358			

图170 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4

供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1630-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 06:32:09 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:31:07 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

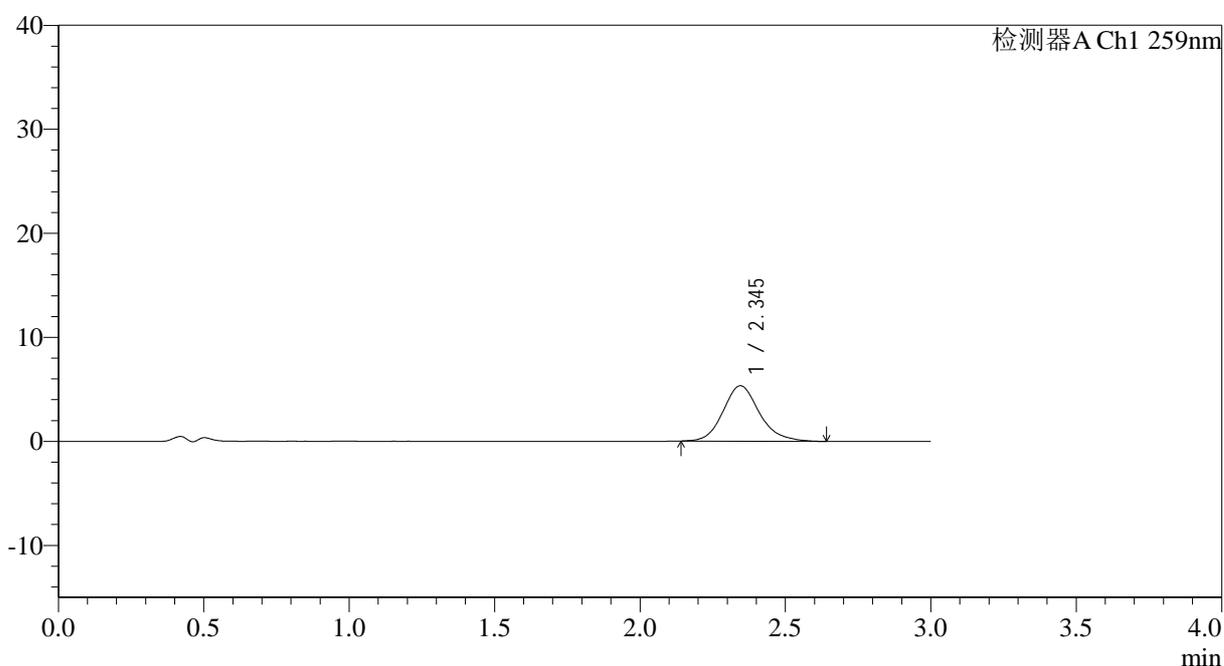

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	46377	100.000	5330	1771	1.157	--
总计		46377	100.000	5330			

图171 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1631-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 06:35:32 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:31:10 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

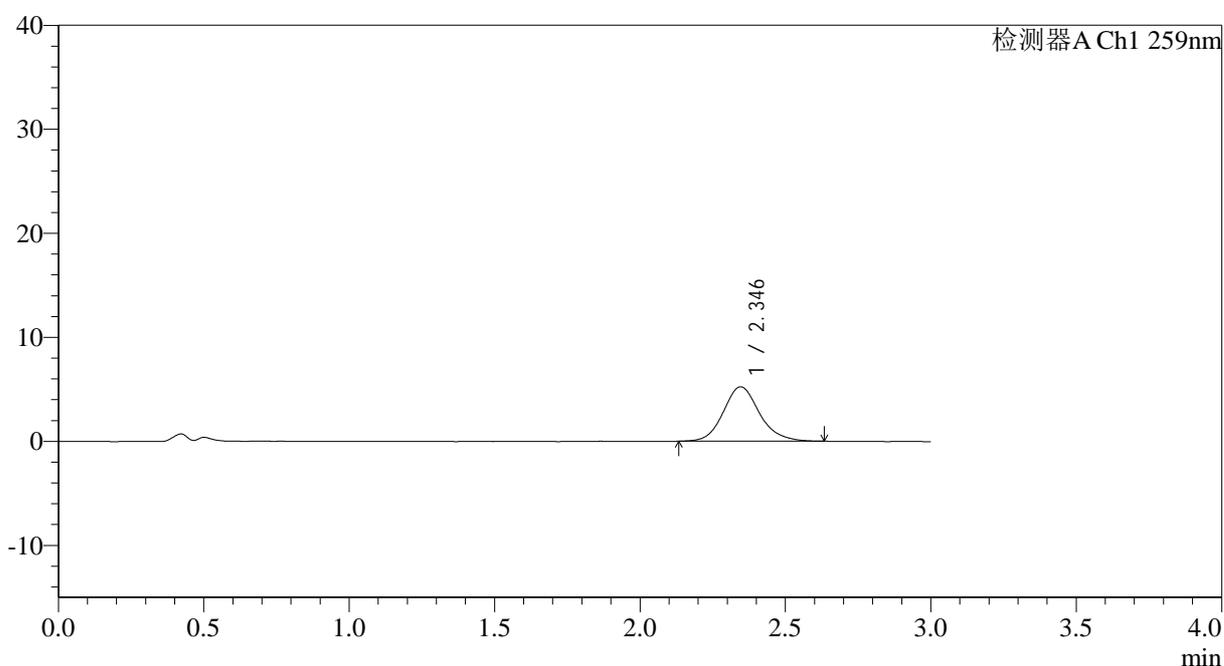

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	45441	100.000	5234	1784	1.138	--
总计		45441	100.000	5234			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1633-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 06:42:17 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:31:16 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

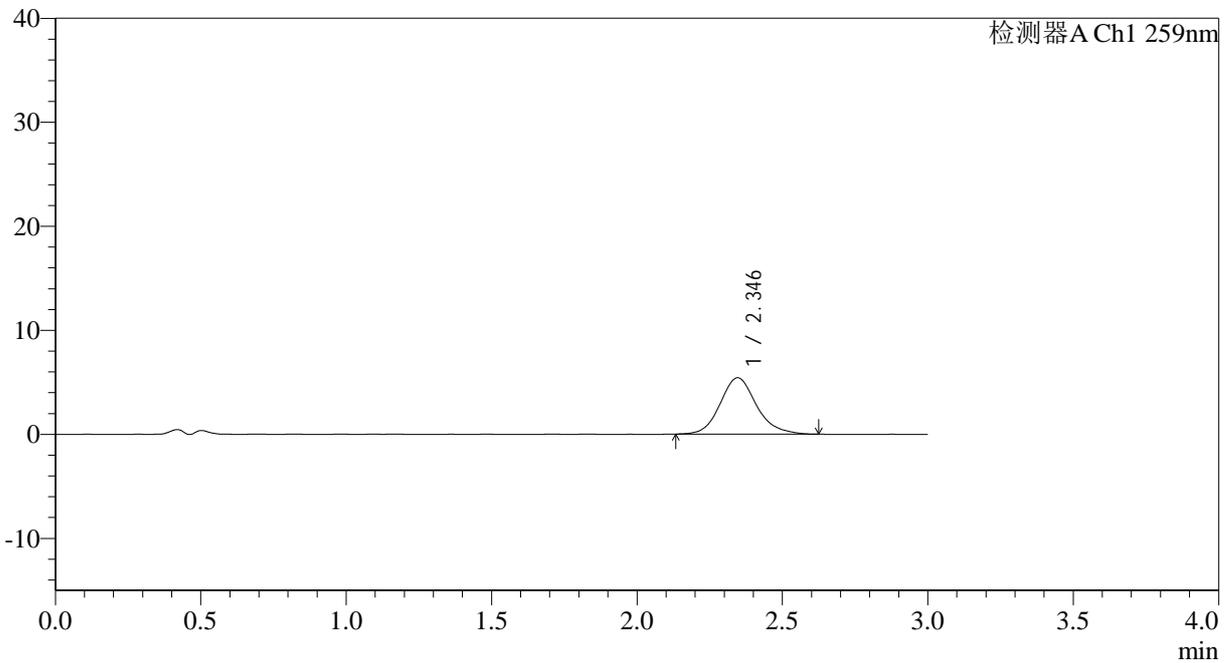

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	47026	100.000	5416	1771	1.147	--
总计		47026	100.000	5416			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1634-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 06:45:40 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:31:18 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

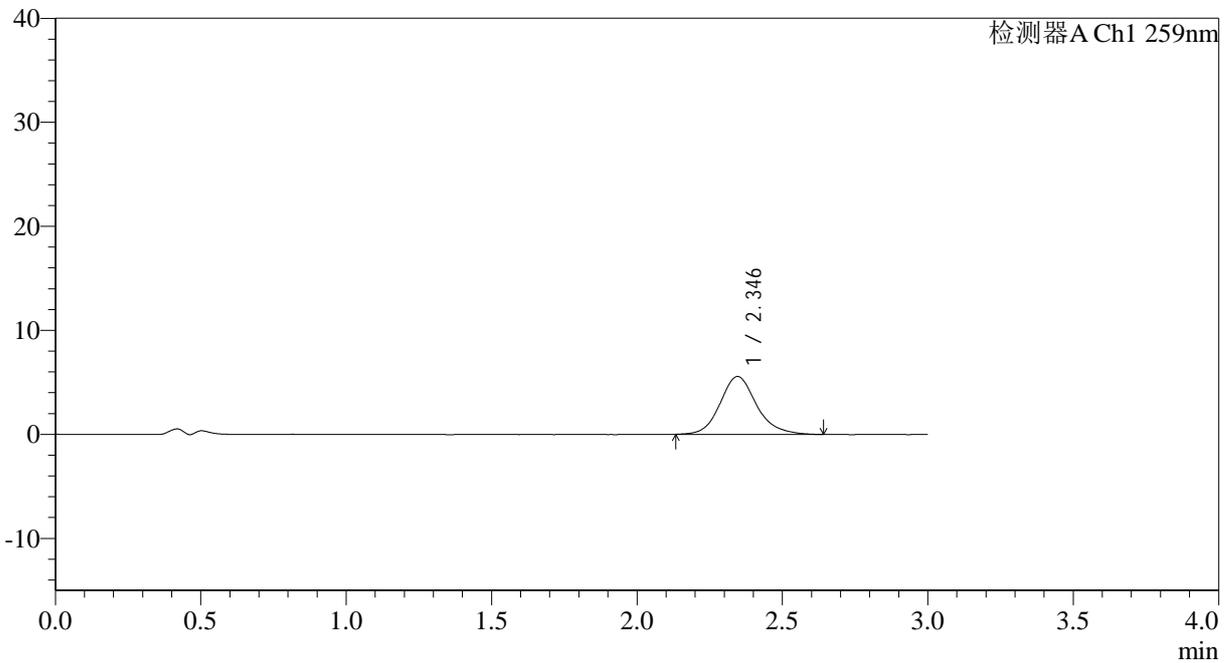

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	48513	100.000	5561	1782	1.148	--
总计		48513	100.000	5561			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1635-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 06:49:03 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:31:21 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

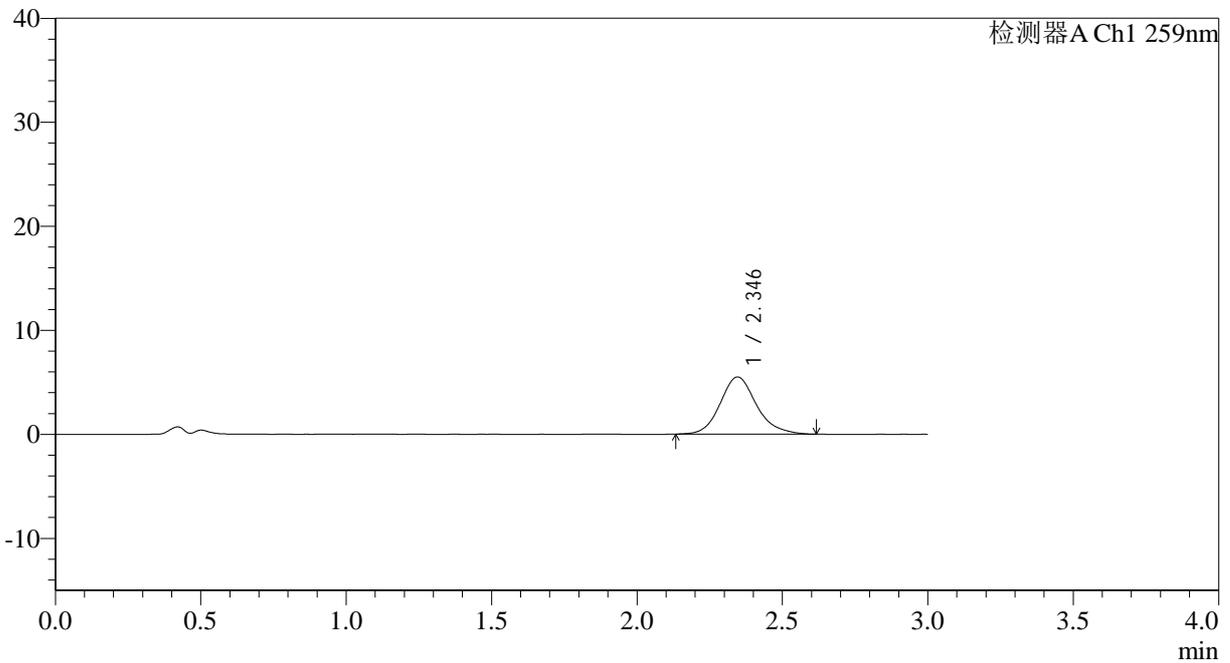

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	47775	100.000	5496	1777	1.156	--
总计		47775	100.000	5496			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1636-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 06:52:27 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:31:24 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

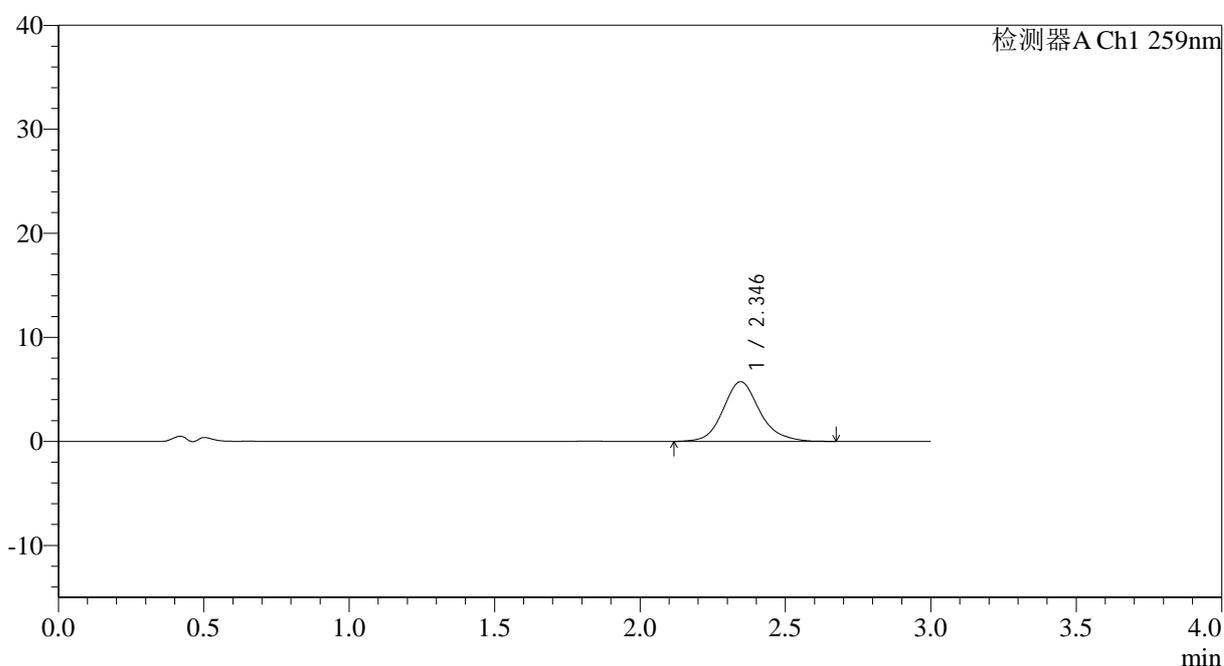

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	50472	100.000	5740	1766	1.152	--
总计		50472	100.000	5740			

图177 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1638-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 06:59:13 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:31:30 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

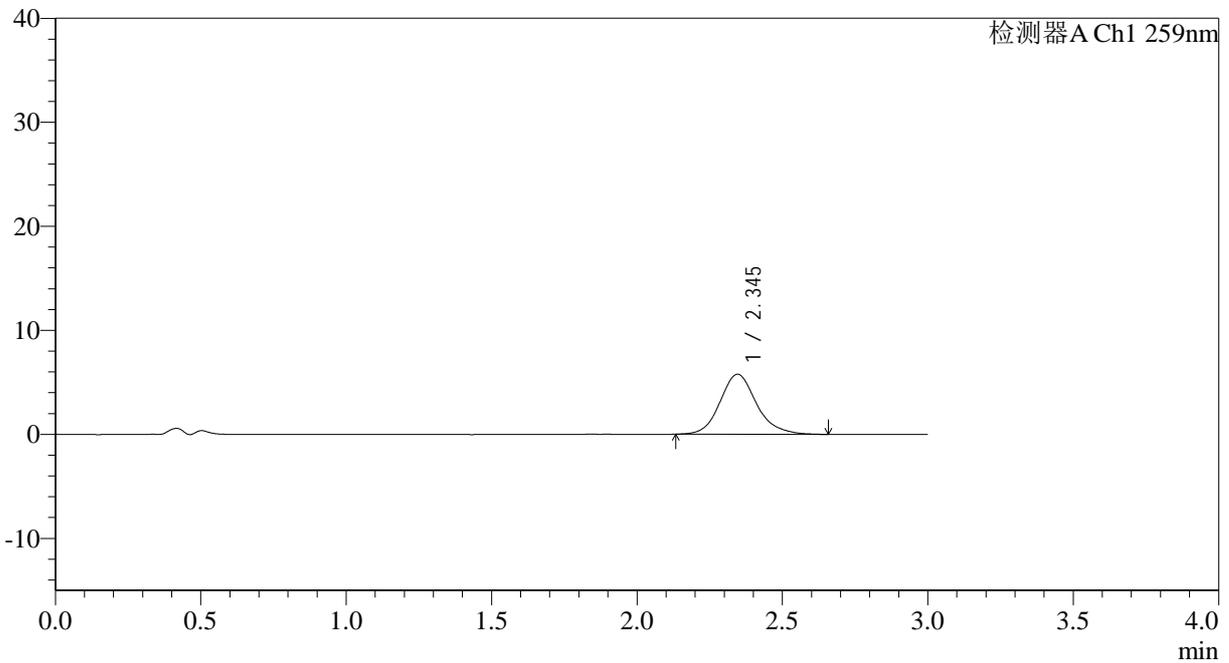

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	50525	100.000	5777	1762	1.150	--
总计		50525	100.000	5777			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1641-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 07:09:24 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:31:39 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

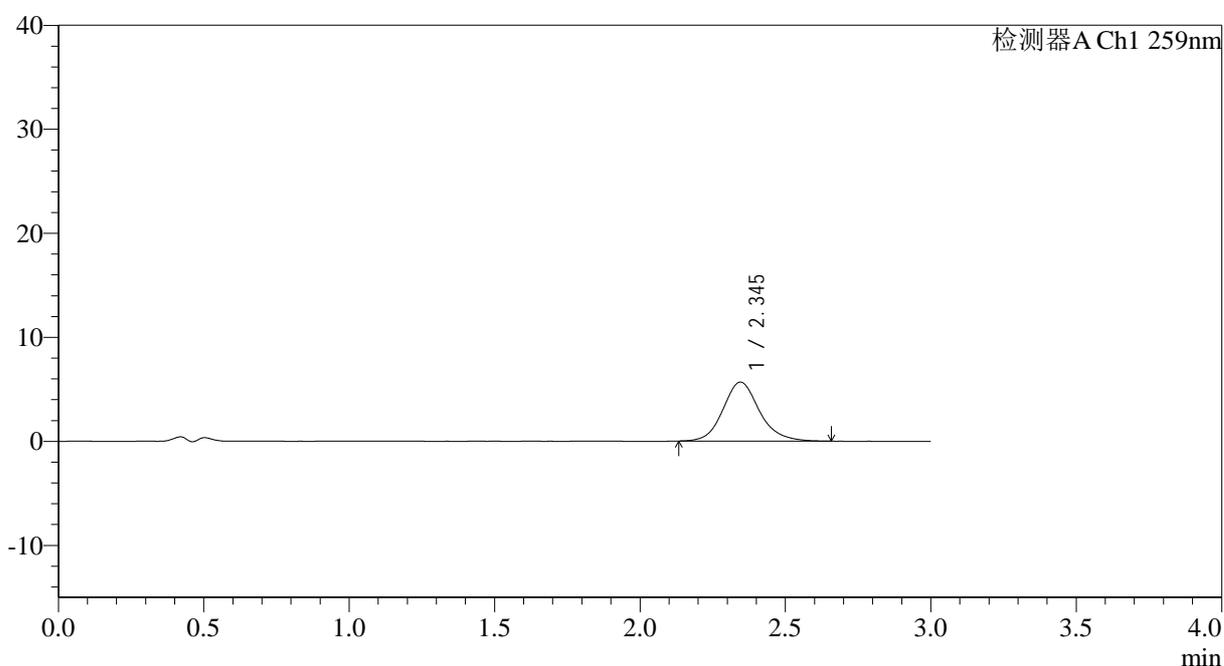

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	49624	100.000	5675	1766	1.141	--
总计		49624	100.000	5675			

图182 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1642-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 07:12:48 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:31:41 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

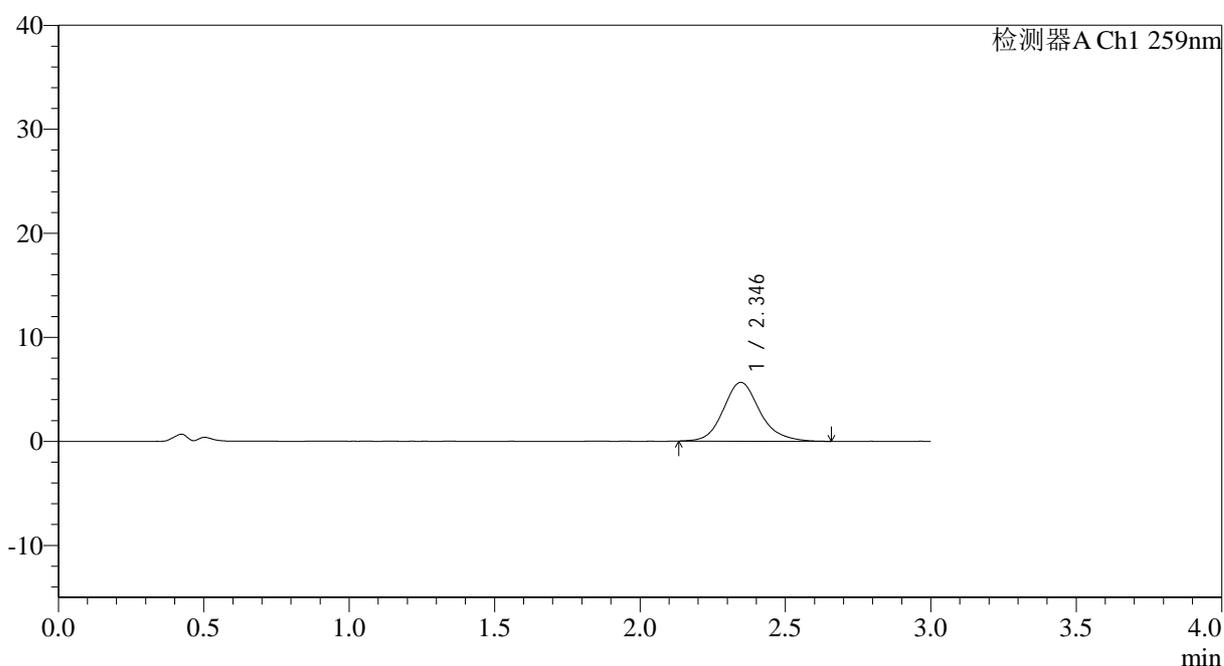

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	49527	100.000	5659	1772	1.158	--
总计		49527	100.000	5659			

图183 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1643-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 07:16:10 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:31:44 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

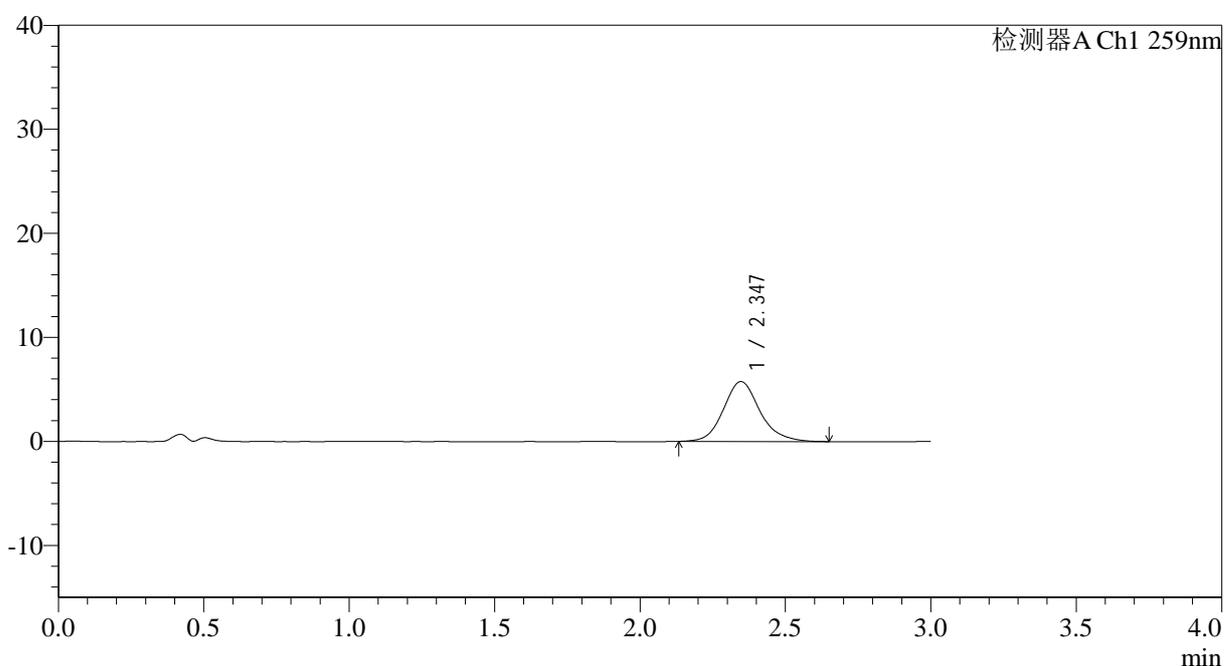

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	50340	100.000	5766	1778	1.152	--
总计		50340	100.000	5766			

图184 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1644-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 07:19:33 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:31:47 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

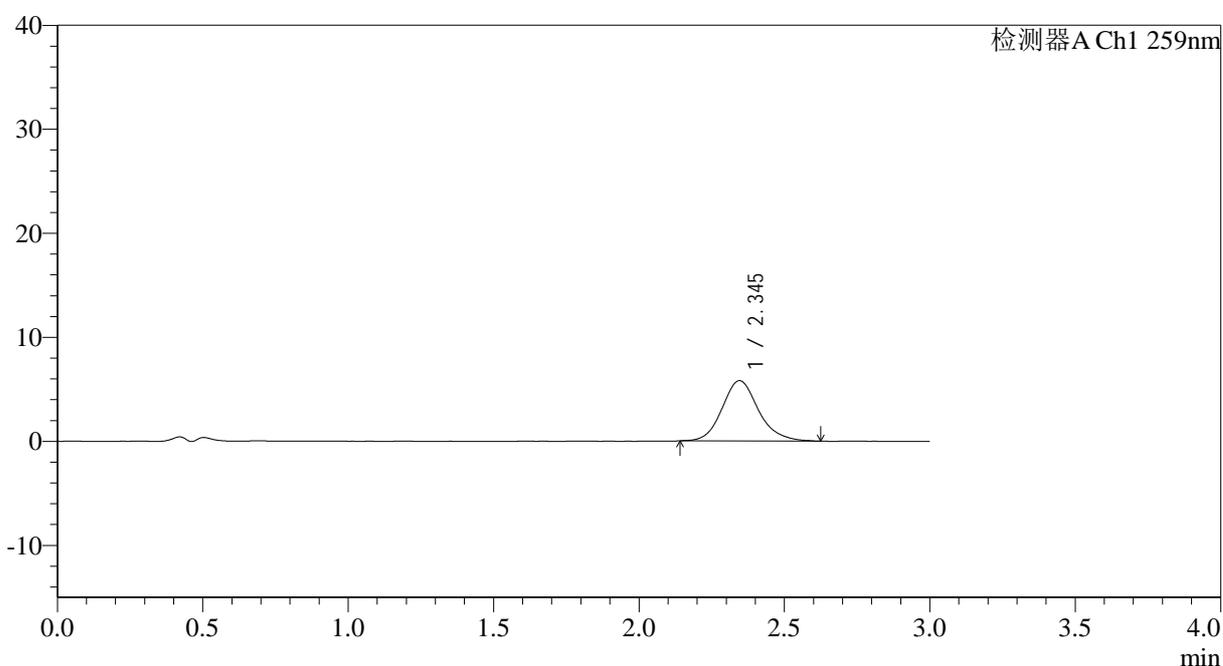

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	50653	100.000	5806	1757	1.148	--
总计		50653	100.000	5806			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1649-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p6-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 07:36:33 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:32:02 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

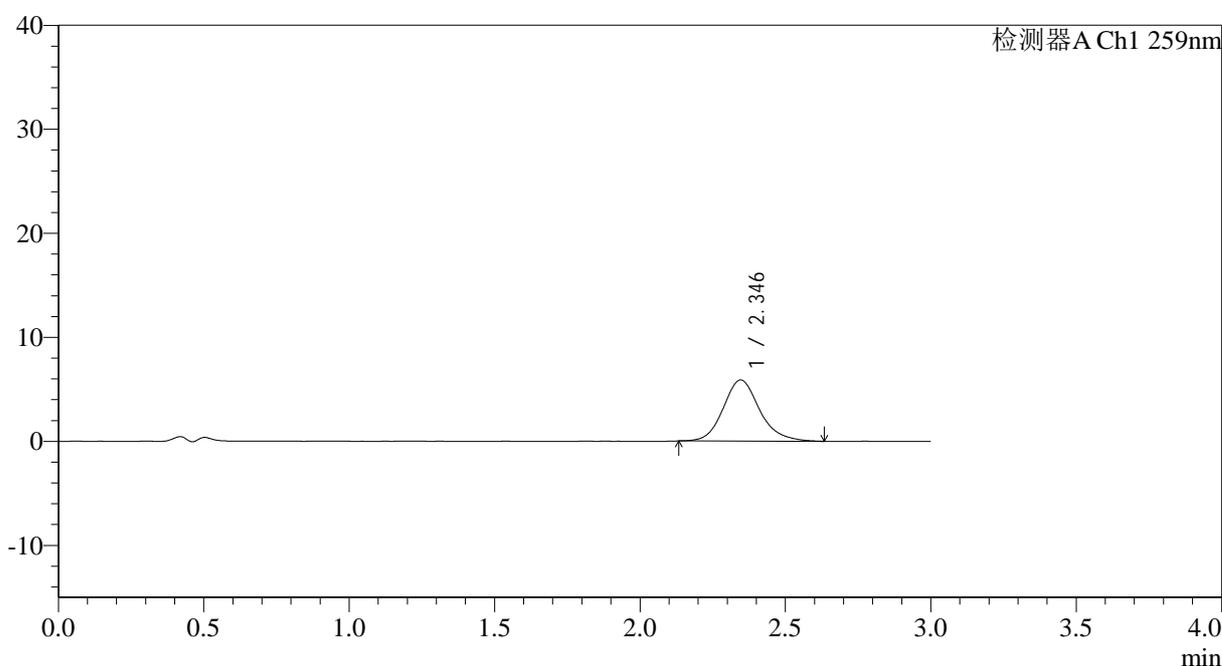

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	51247	100.000	5879	1770	1.159	--
总计		51247	100.000	5879			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1655-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p6-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-52
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 07:56:59 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:32:19 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

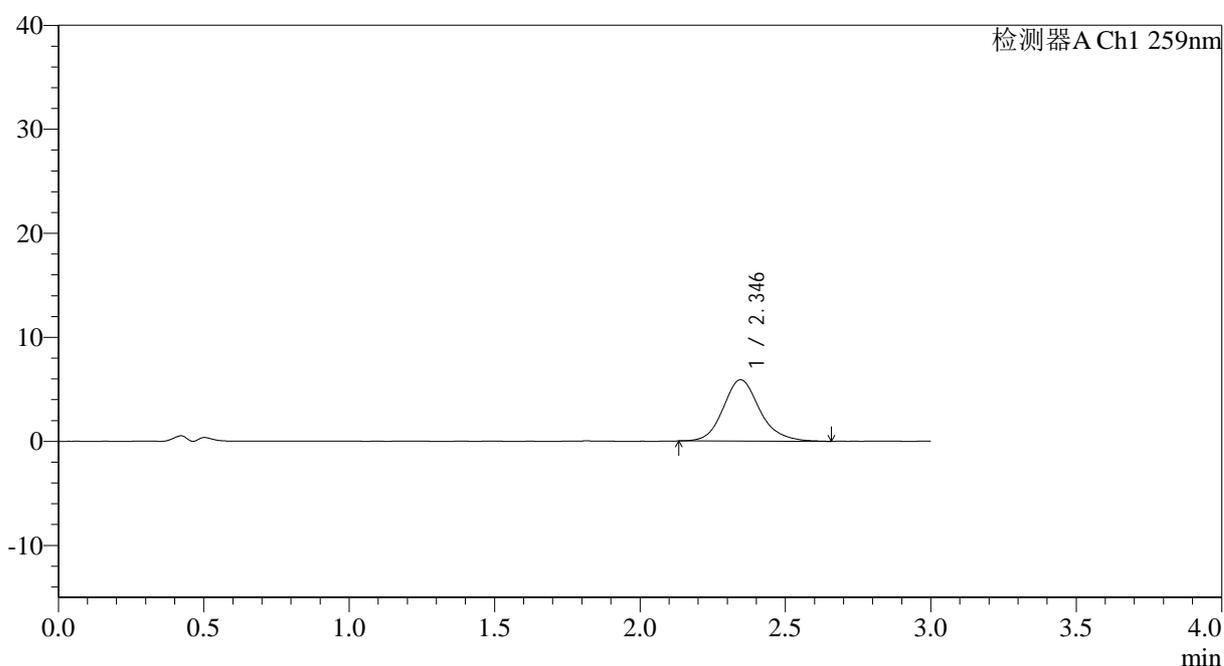

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	51569	100.000	5904	1762	1.158	--
总计		51569	100.000	5904			

图196 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片6

供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1656-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-8
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 08:00:24 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:32:23 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

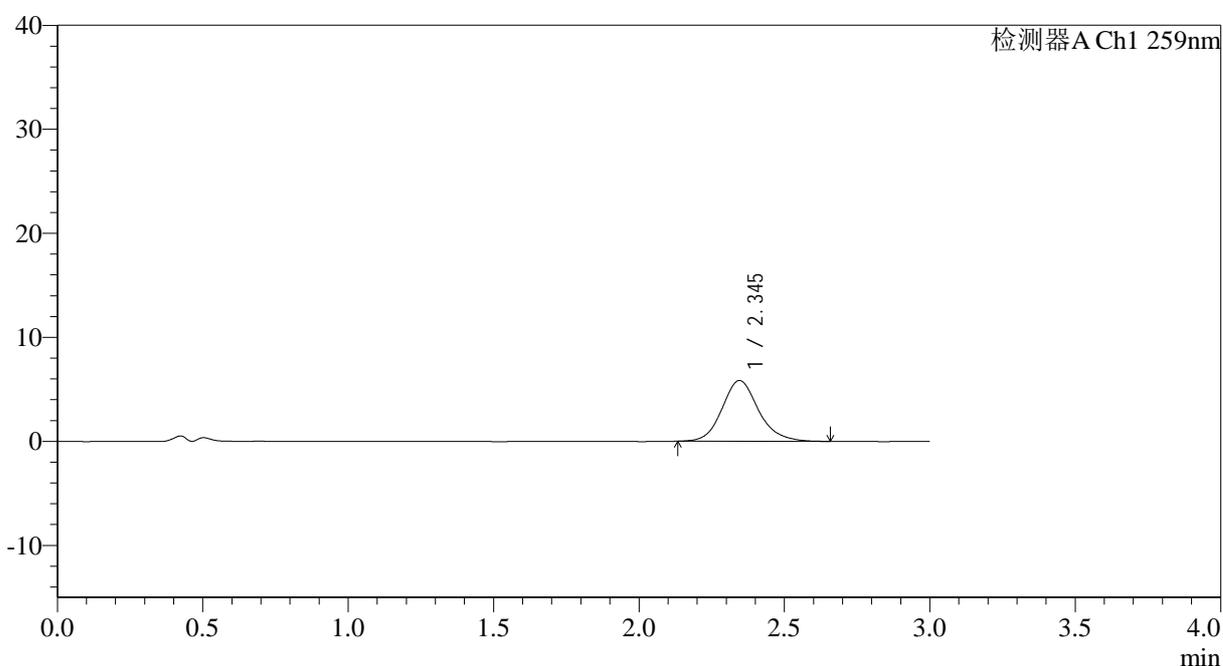

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	51193	100.000	5845	1756	1.154	--
总计		51193	100.000	5845			

图197 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1

供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1658-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-26
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 08:07:13 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:32:29 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

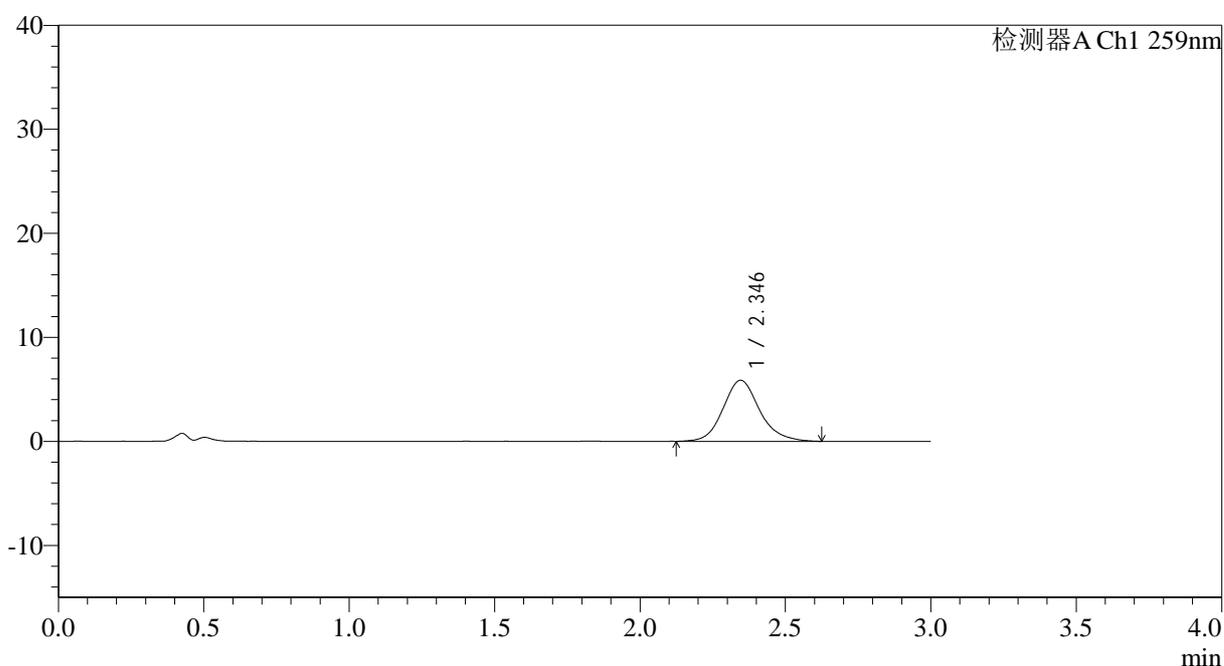

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	51328	100.000	5868	1749	1.145	--
总计		51328	100.000	5868			

图199 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3

供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1659-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-35
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 08:10:38 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:32:32 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

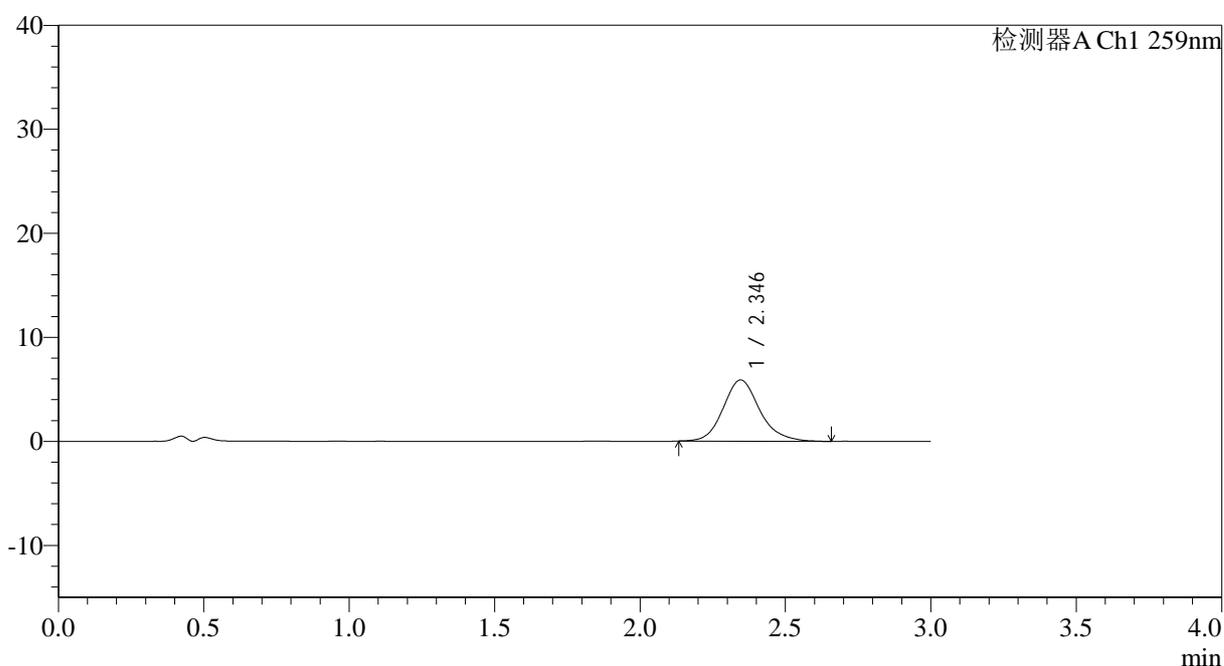

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	51537	100.000	5889	1763	1.159	--
总计		51537	100.000	5889			

图200 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4

供试品溶液-1

200




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1660-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-44
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 08:14:02 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:32:34 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

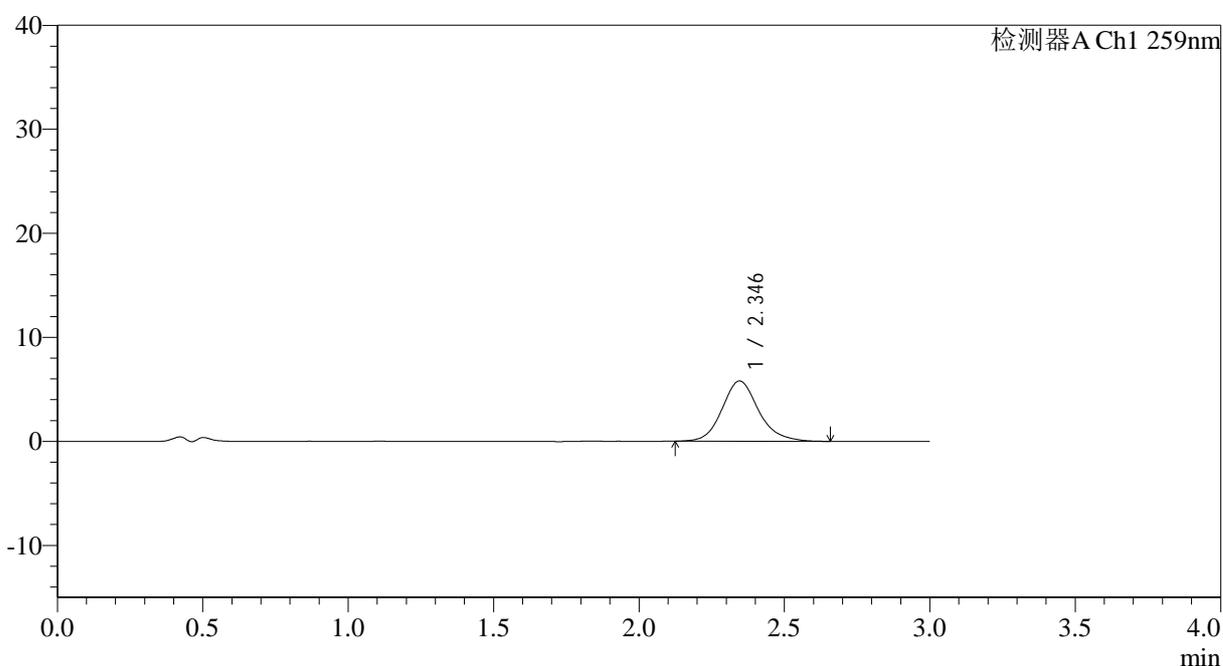

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	50825	100.000	5800	1752	1.155	--
总计		50825	100.000	5800			

图201 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5

供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1662-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 08:20:50 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:32:40 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

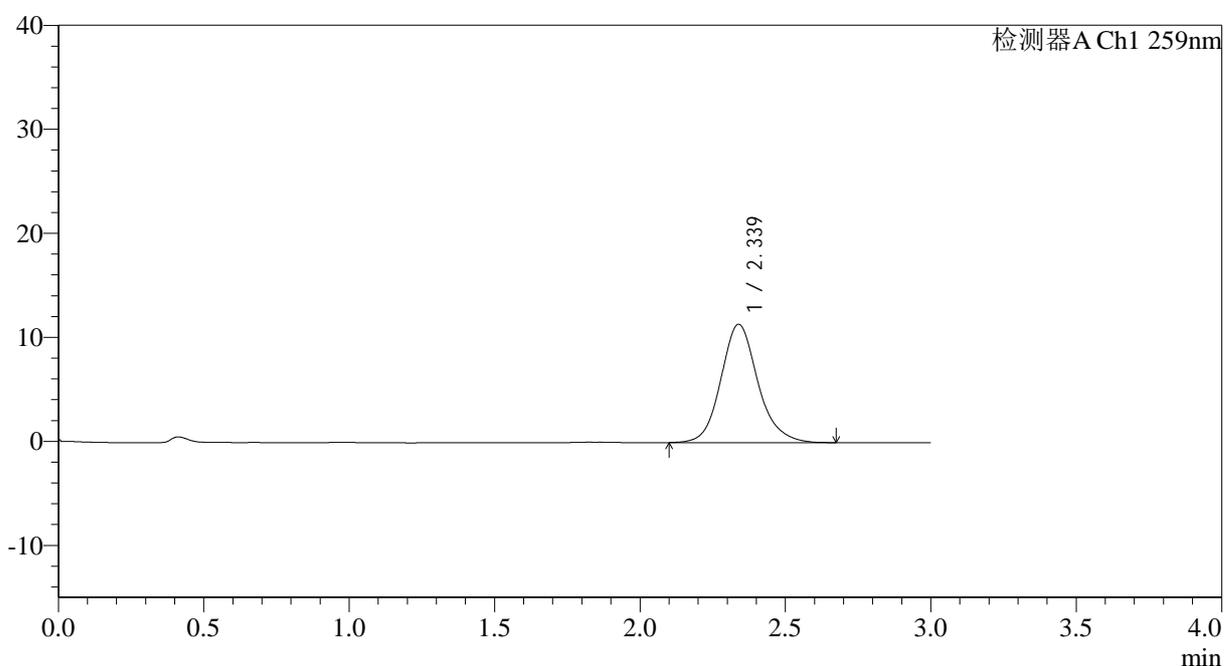

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	101015	100.000	11389	1709	1.142	--
总计		101015	100.000	11389			

图203 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-62/11-1663-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250701-RCQX-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/02 08:24:14 实验者: liuqihuizi
 处理时间 (V2): 2025/07/02 09:32:43 处理者: liuqihuizi
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV

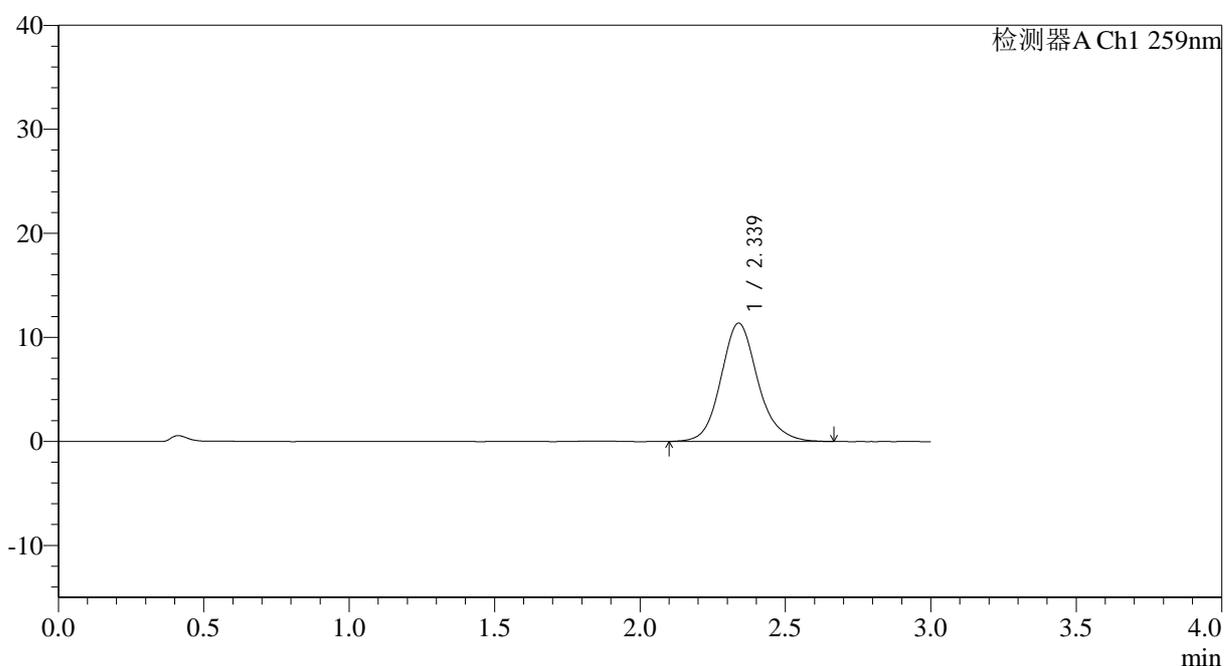

<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	100584	100.000	11378	1711	1.141	--
总计		100584	100.000	11378			

图204 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025051622批-均一性1-(每杯投2片)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2