




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1635-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 16:58:31 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:05 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

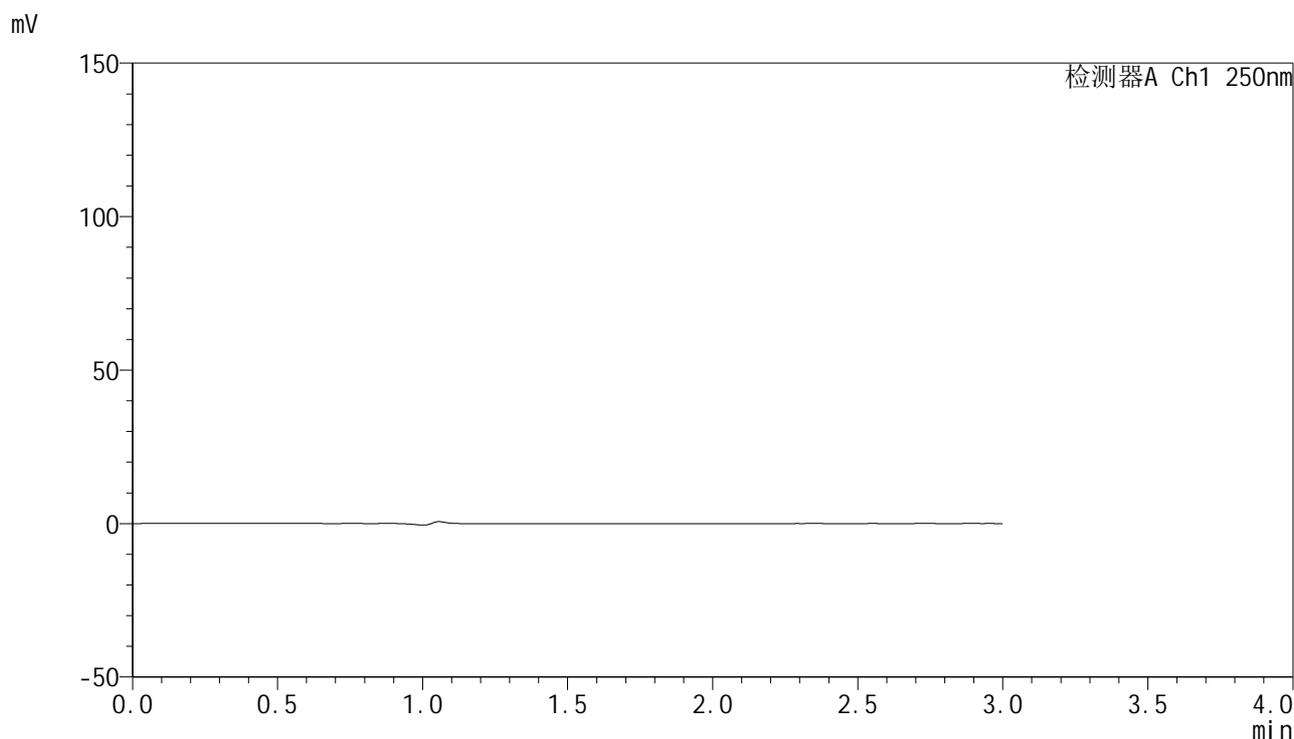

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
 溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1636-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 17:01:54 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:09 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

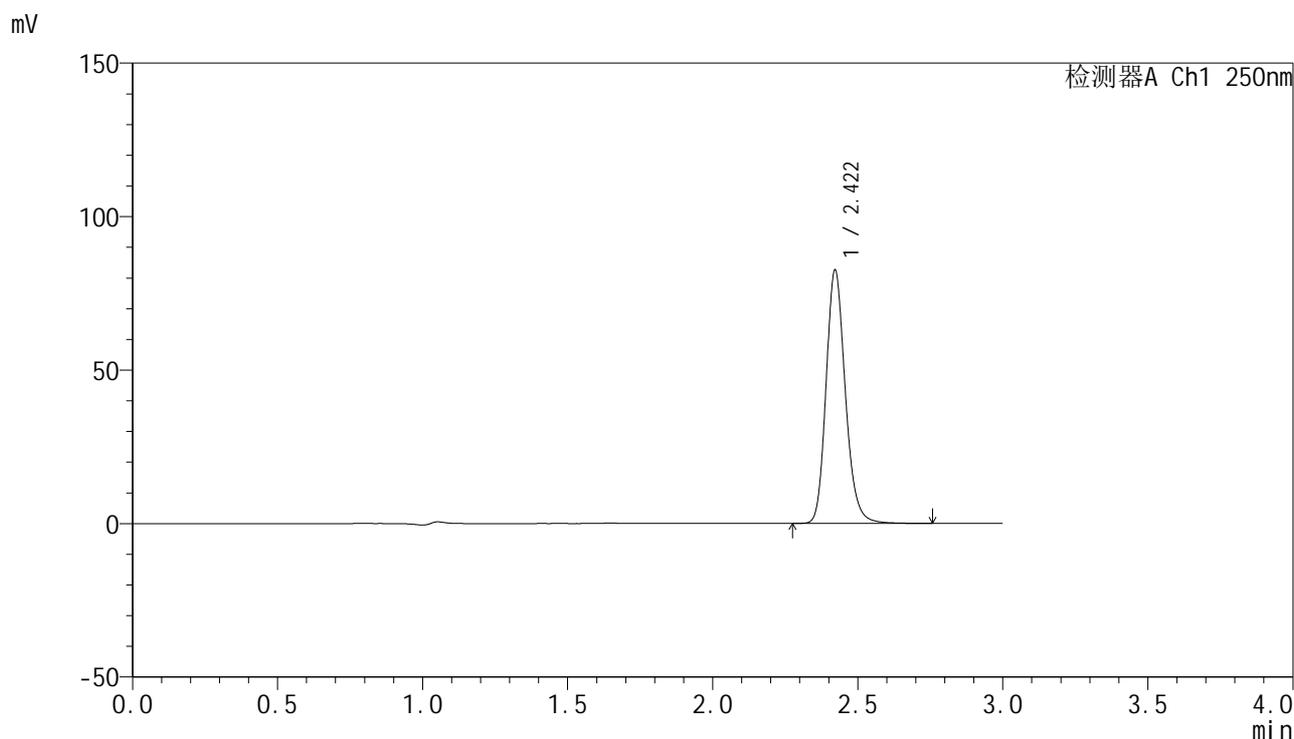

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.422	379738	100.000	82535	6603	1.188	--
总计		379738	100.000	82535			

图2 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1637-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 17:05:17 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:12 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

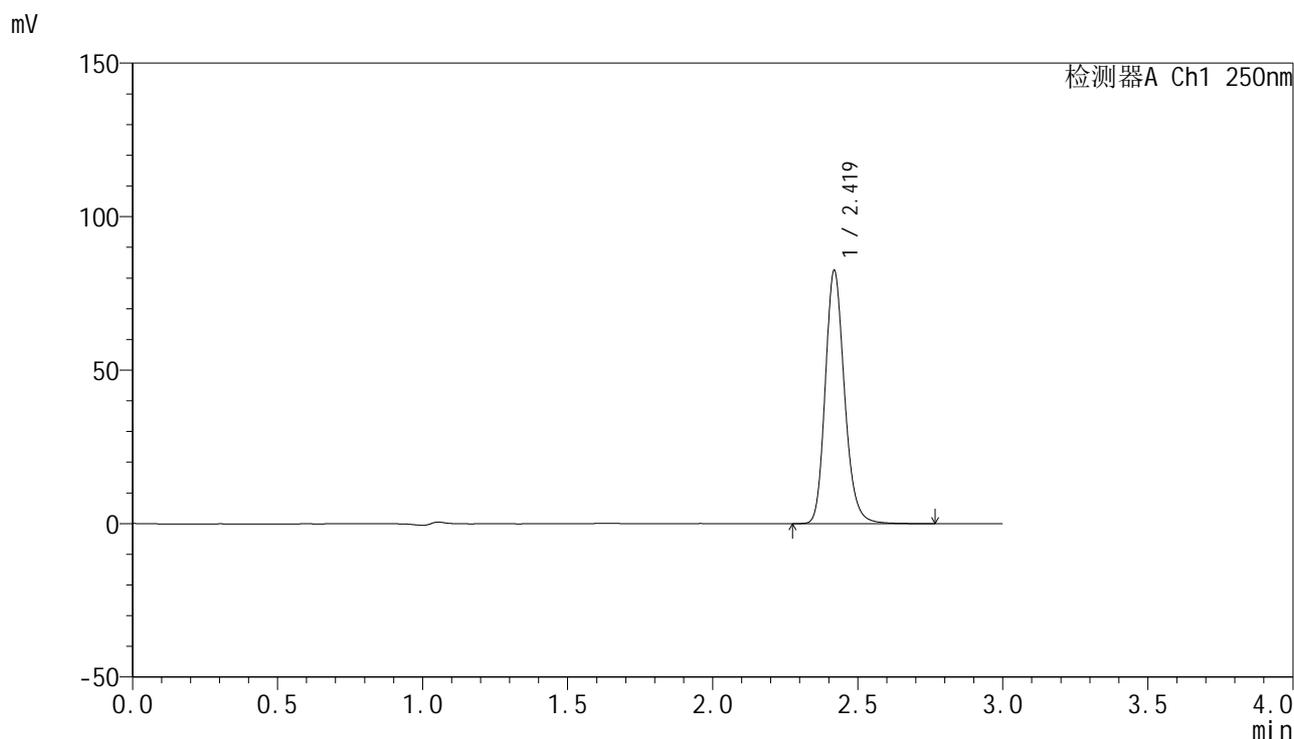

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.419	379837	100.000	82054	6575	1.189	--
总计		379837	100.000	82054			

图3 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1638-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 17:08:39 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:15 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

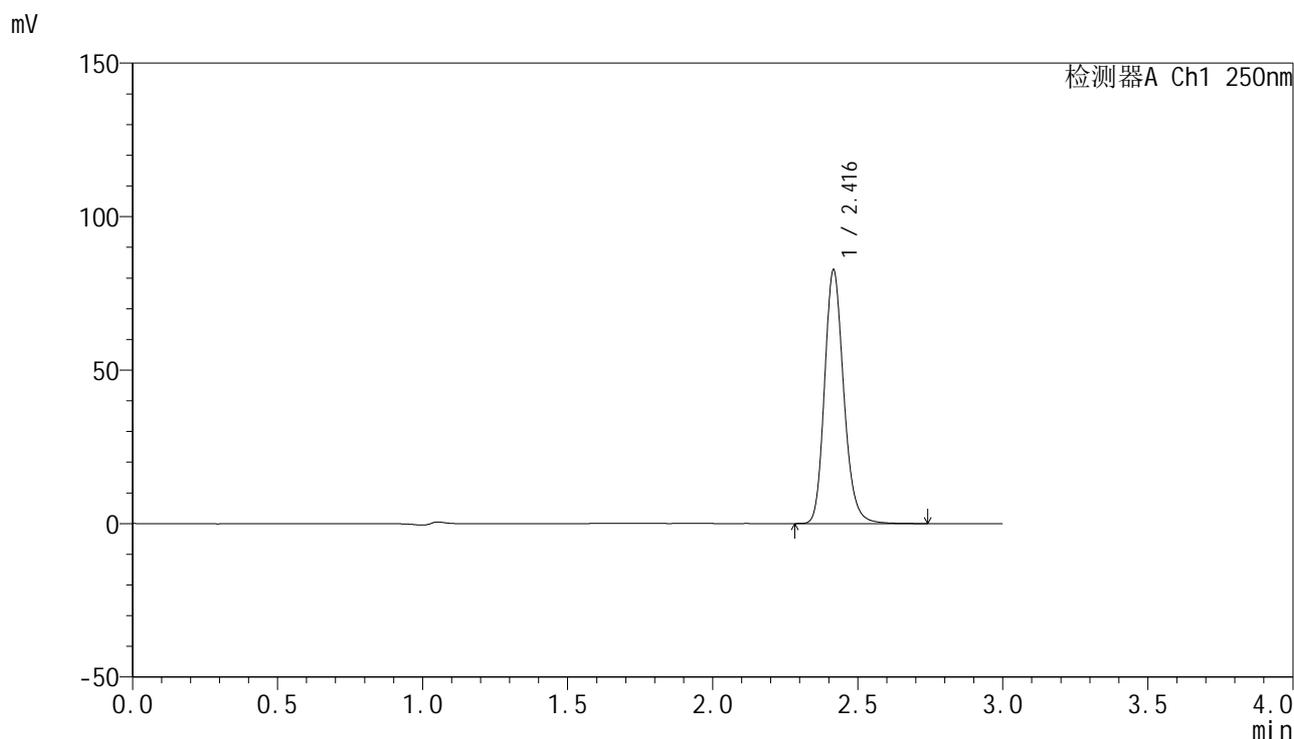

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.416	379717	100.000	82279	6590	1.189	--
总计		379717	100.000	82279			

图4 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1639-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 17:12:02 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:18 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

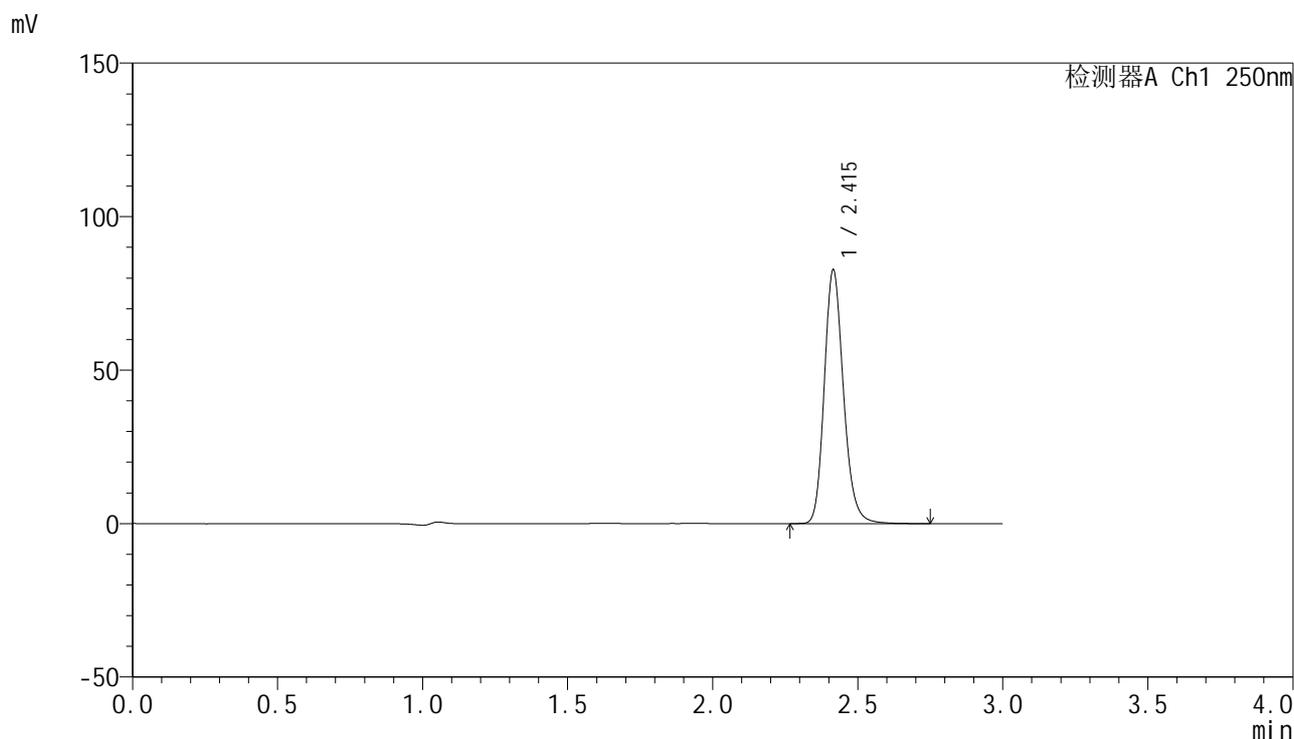

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.415	380015	100.000	82541	6593	1.190	--
总计		380015	100.000	82541			

图5 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1640-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 17:15:25 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:21 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

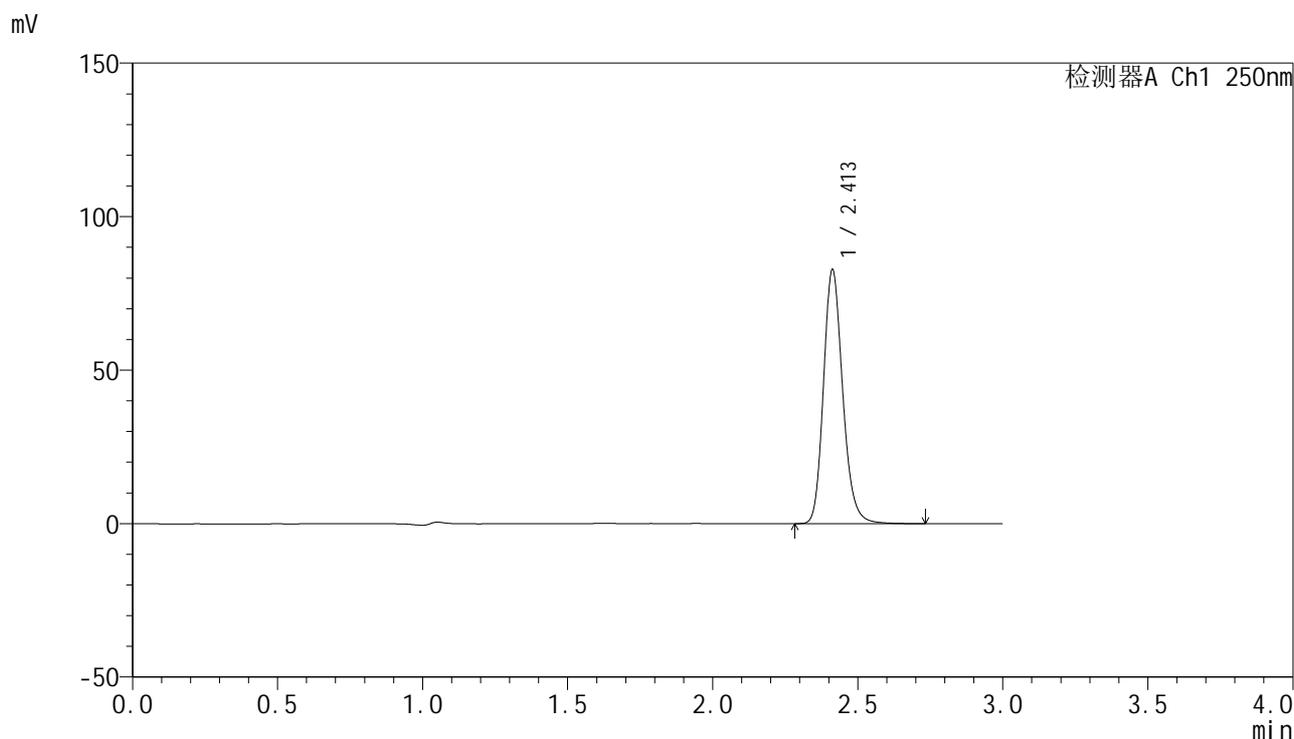

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.413	380219	100.000	82757	6582	1.188	--
总计		380219	100.000	82757			

图6 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1641-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 17:18:47 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:24 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

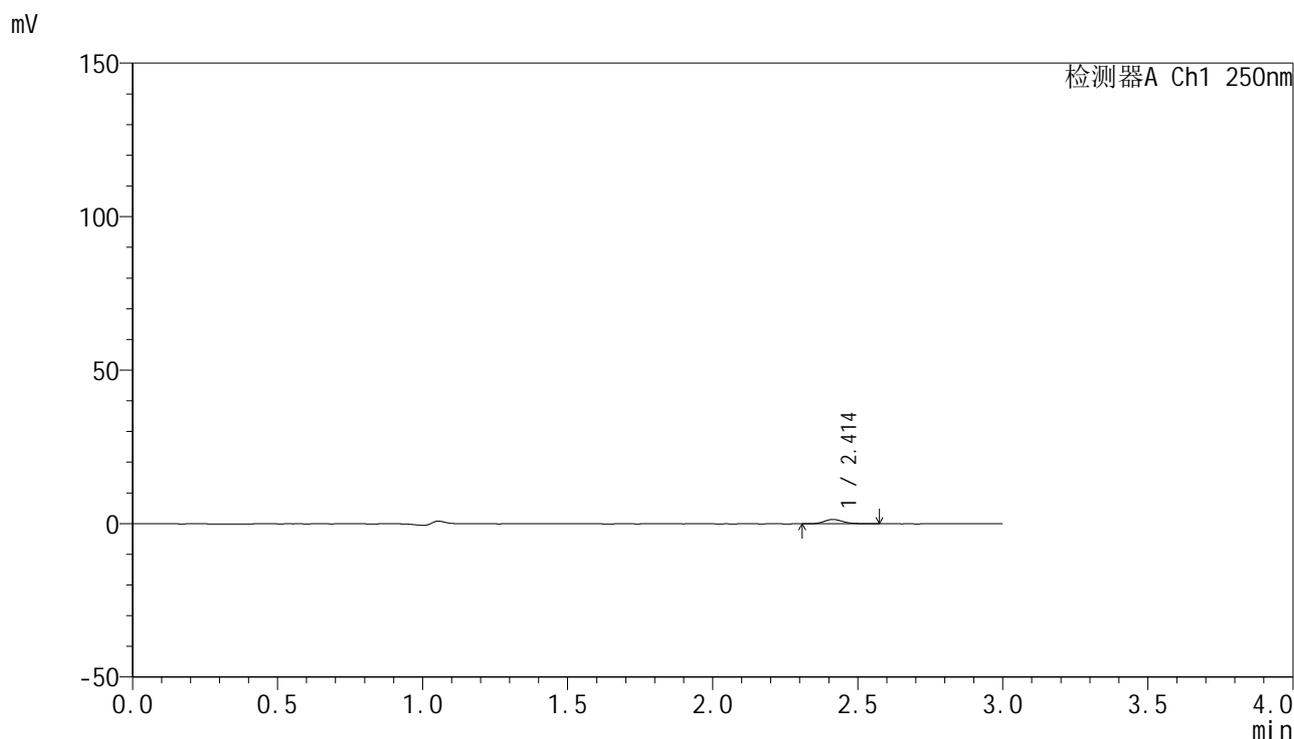

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.414	6319	100.000	1409	6696	1.194	--
总计		6319	100.000	1409			

图7 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1642-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 17:22:09 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:27 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

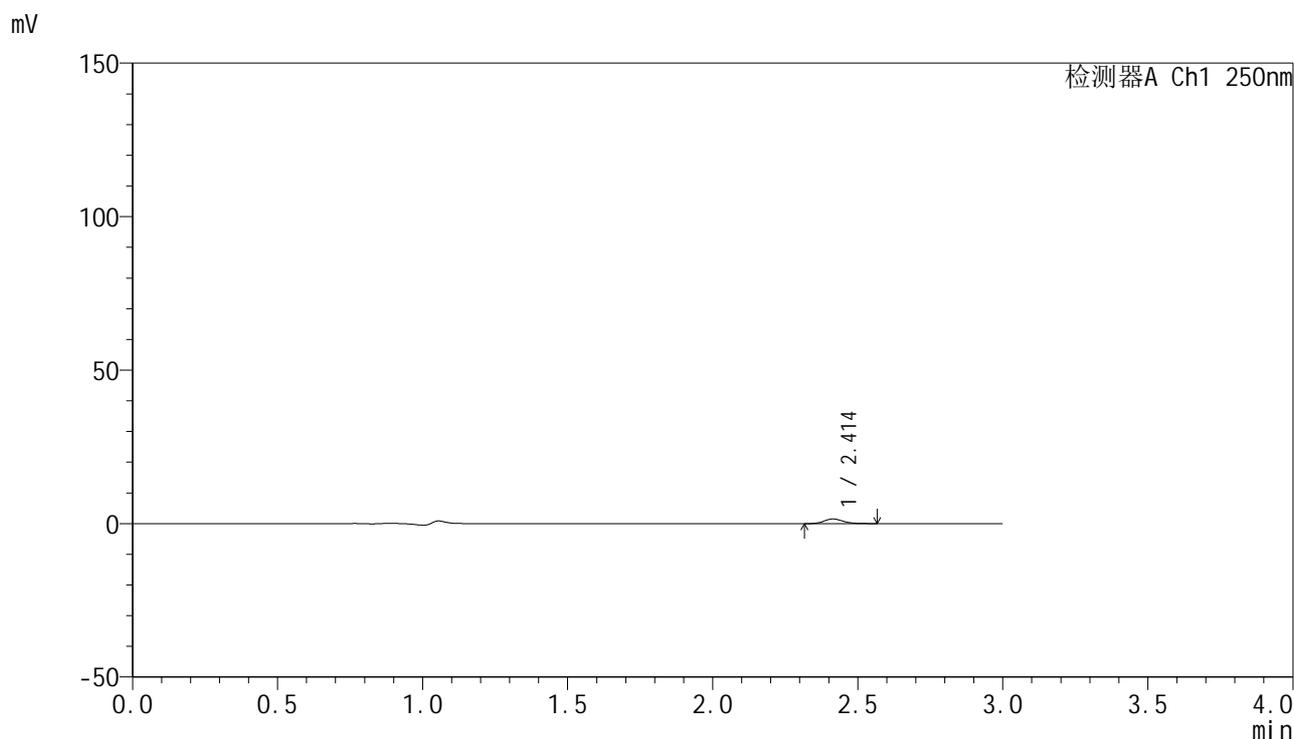

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.414	6754	100.000	1506	6719	1.184	--
总计		6754	100.000	1506			

图8 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1643-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 17:25:31 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:30 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

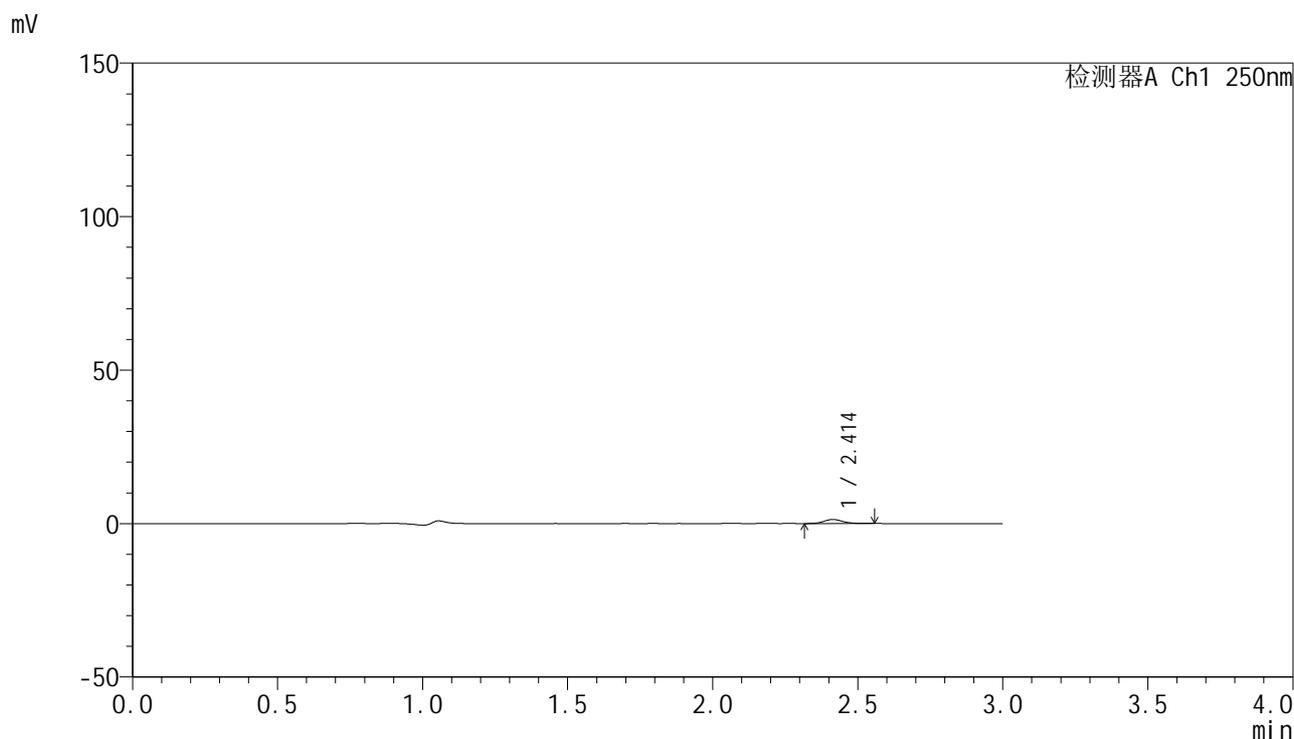

<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.414	5924	100.000	1326	6782	1.140	--
总计		5924	100.000	1326			

图9 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1644-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 17:28:52 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:33 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

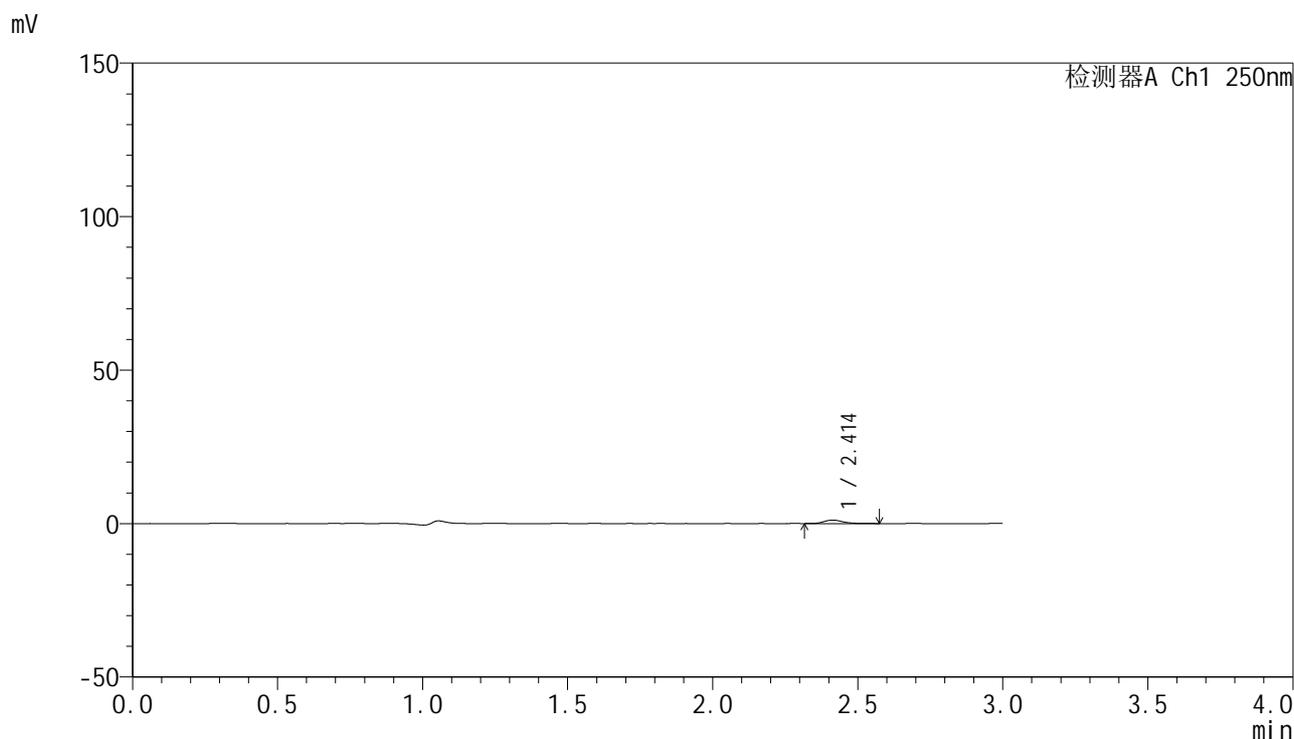

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.414	5094	100.000	1136	6947	1.239	--
总计		5094	100.000	1136			

图10 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1645-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 17:32:15 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:35 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

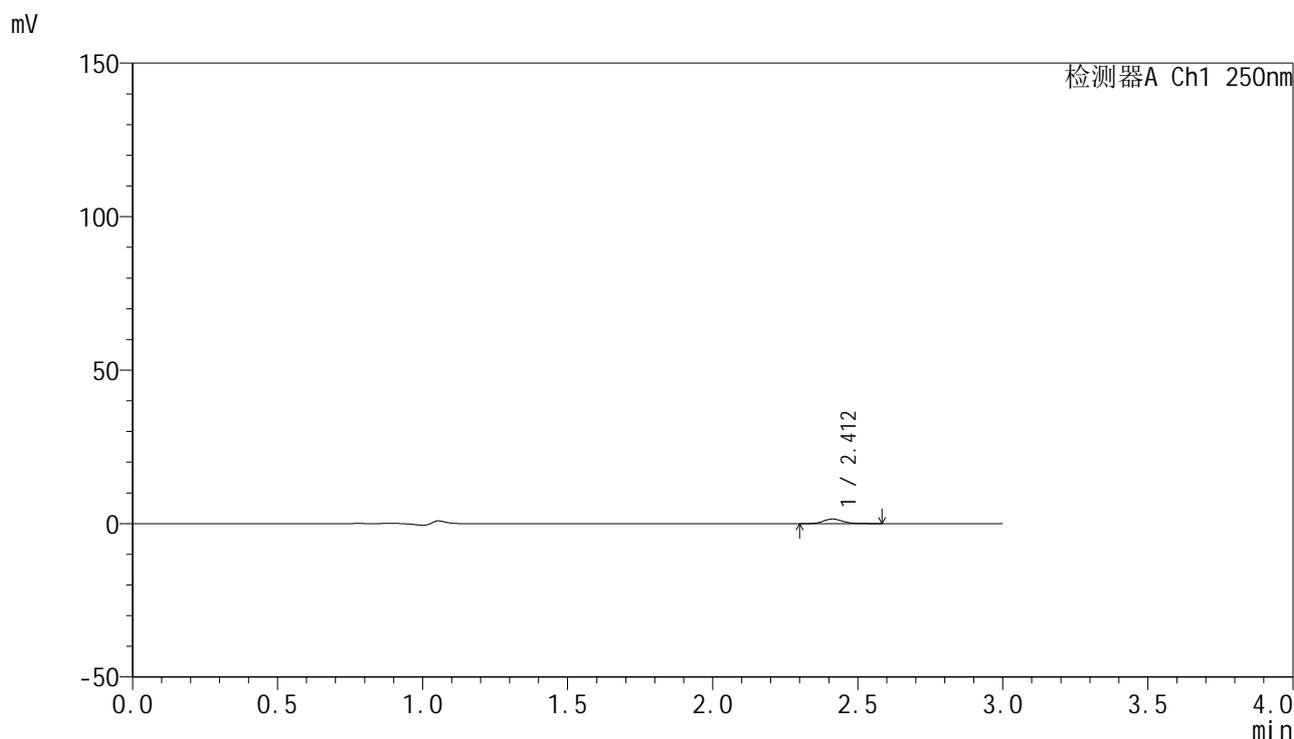

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.412	6822	100.000	1502	6740	1.163	--
总计		6822	100.000	1502			

图11 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1646-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 17:35:37 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:38 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

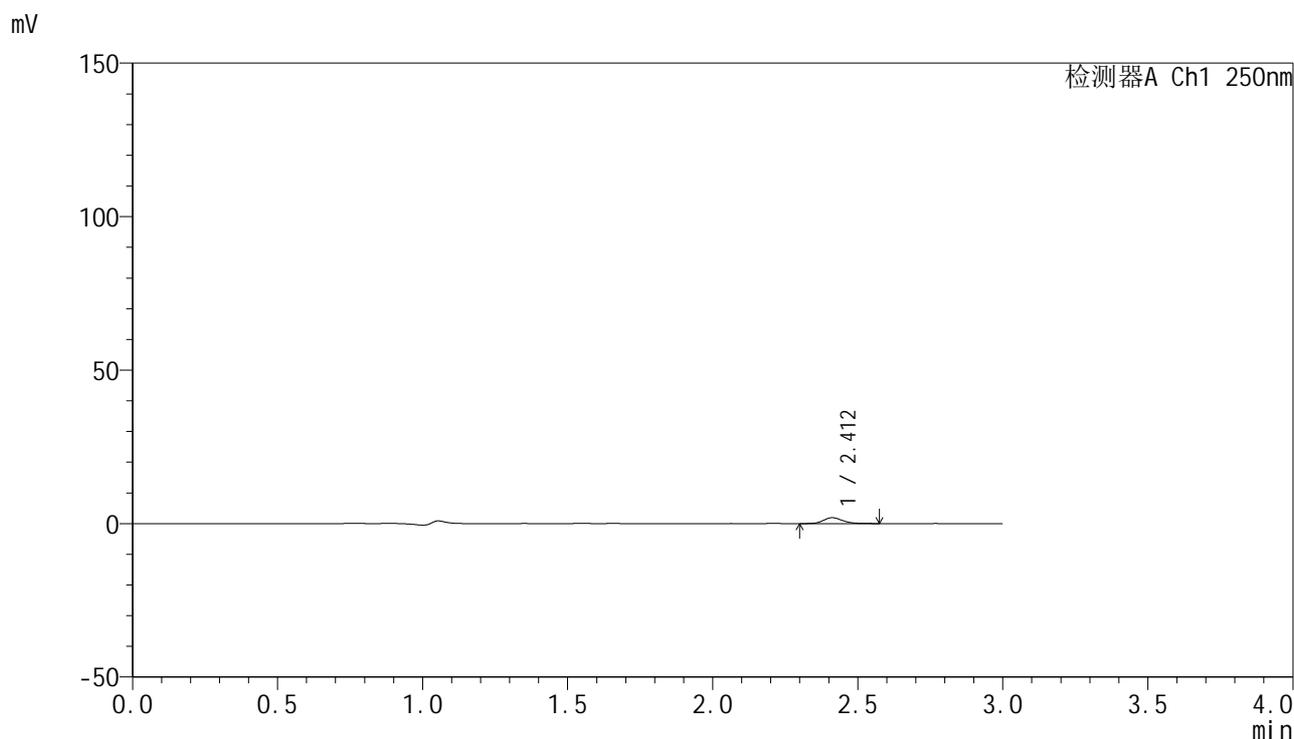

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.412	8658	100.000	1910	6664	1.207	--
总计		8658	100.000	1910			

图12 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1647-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 17:38:59 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:41 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

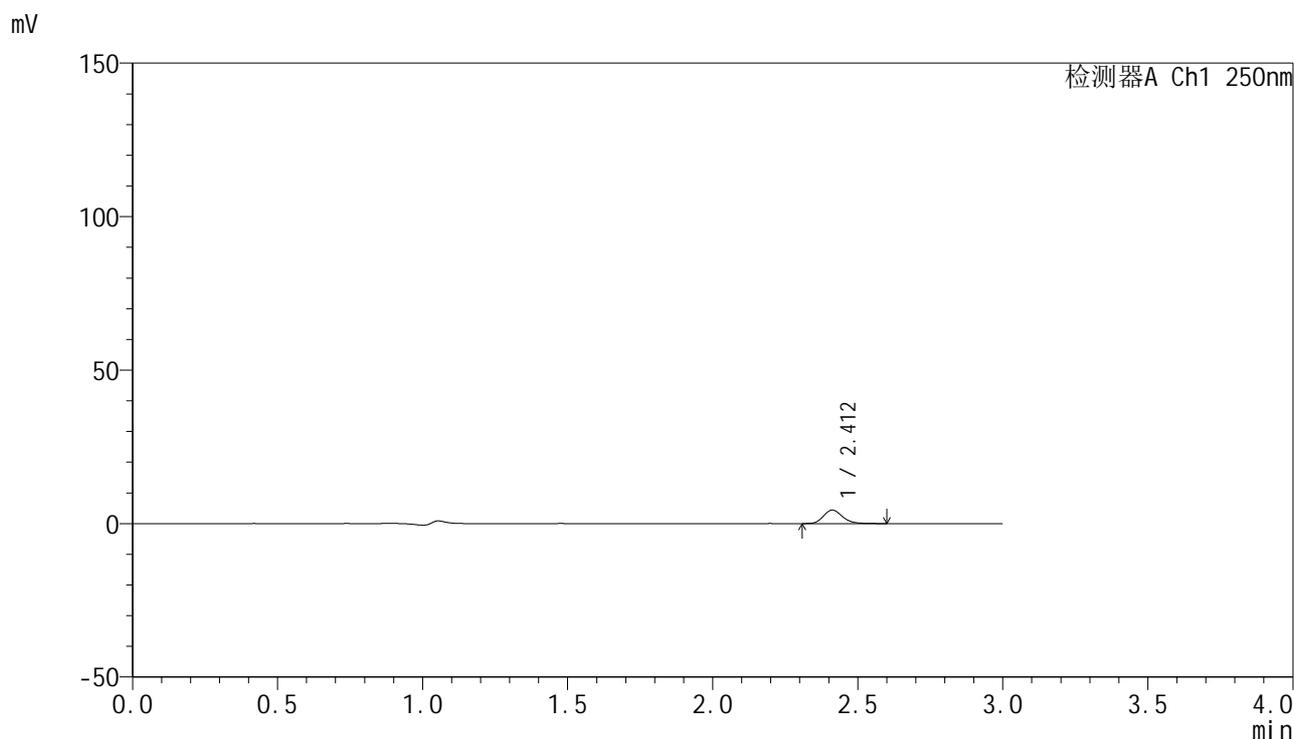

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.412	19833	100.000	4395	6717	1.180	--
总计		19833	100.000	4395			

图13 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1648-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 17:42:21 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:44 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

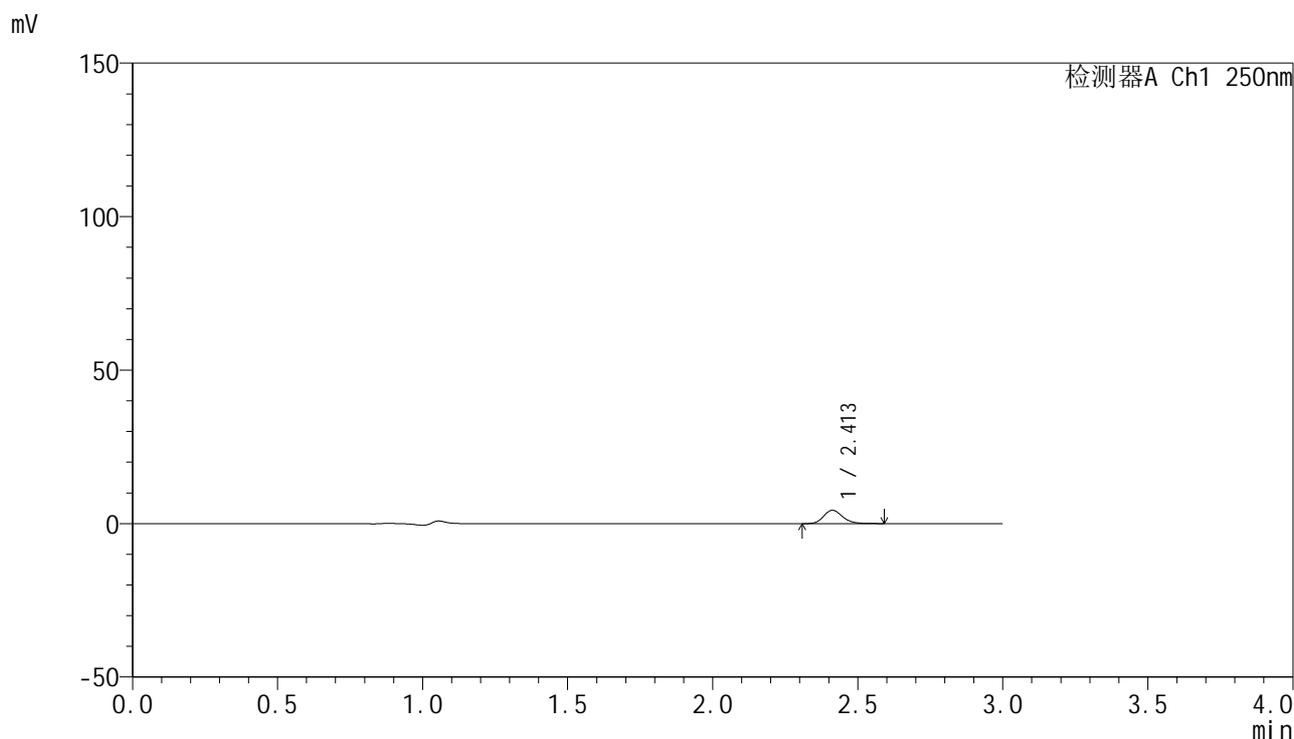

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.413	19767	100.000	4371	6716	1.190	--
总计		19767	100.000	4371			

图14 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1649-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 17:45:43 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:47 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

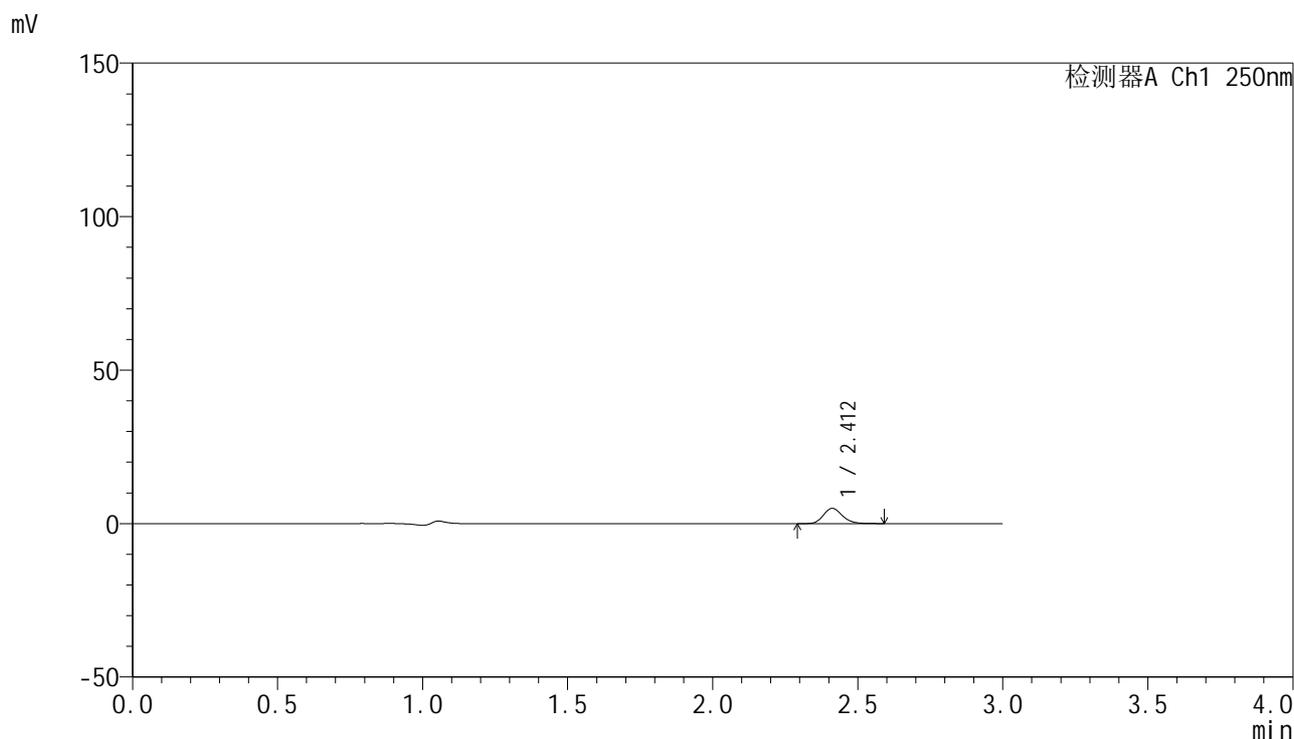

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.412	22601	100.000	4988	6678	1.178	--
总计		22601	100.000	4988			

图15 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1650-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 17:49:05 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:50 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

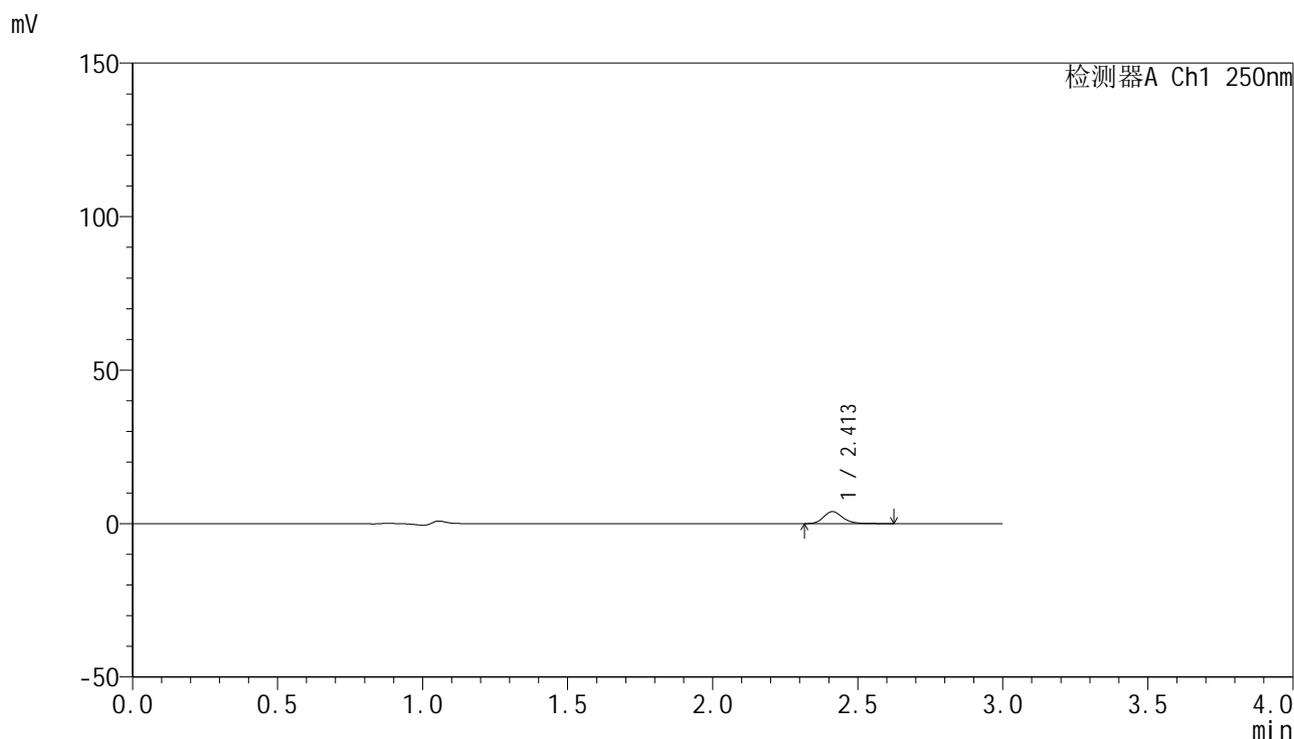

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.413	17840	100.000	3916	6694	1.199	--
总计		17840	100.000	3916			

图16 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1651-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 17:52:27 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:53 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

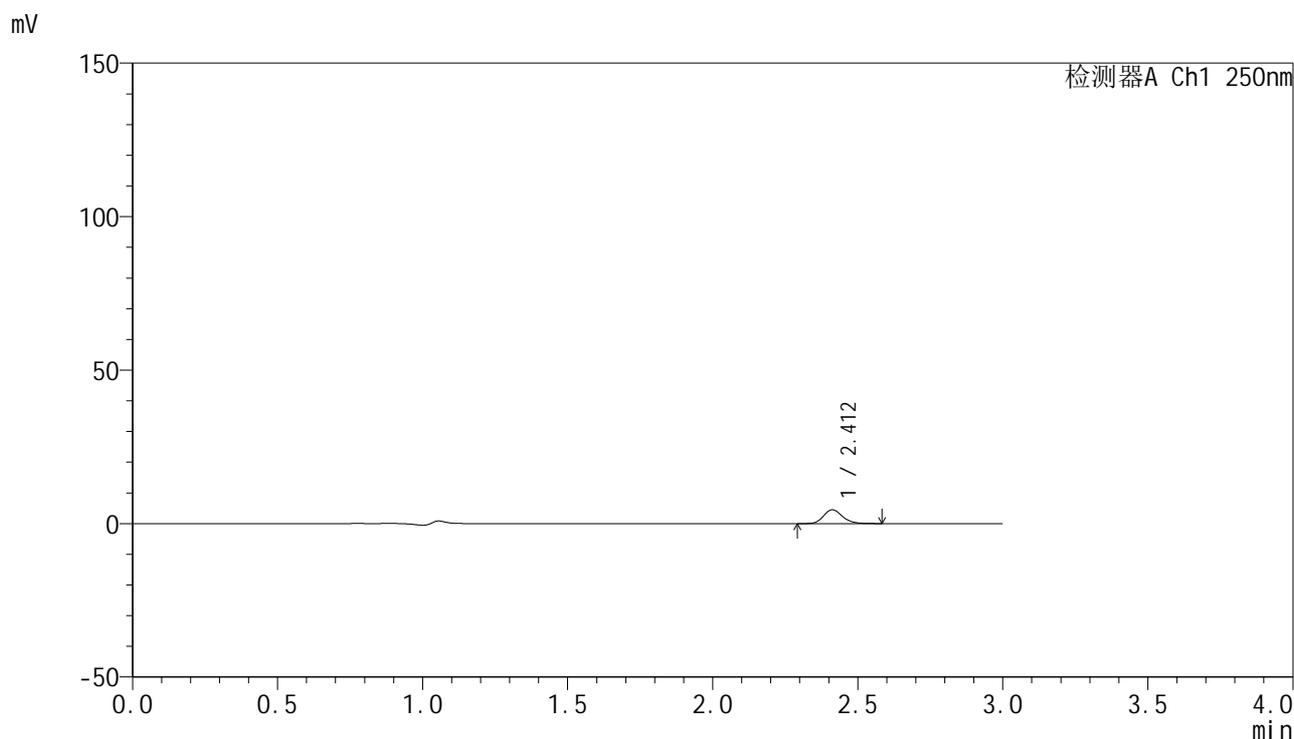

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.412	20333	100.000	4495	6750	1.184	--
总计		20333	100.000	4495			

图17 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1652-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 17:55:49 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:56 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

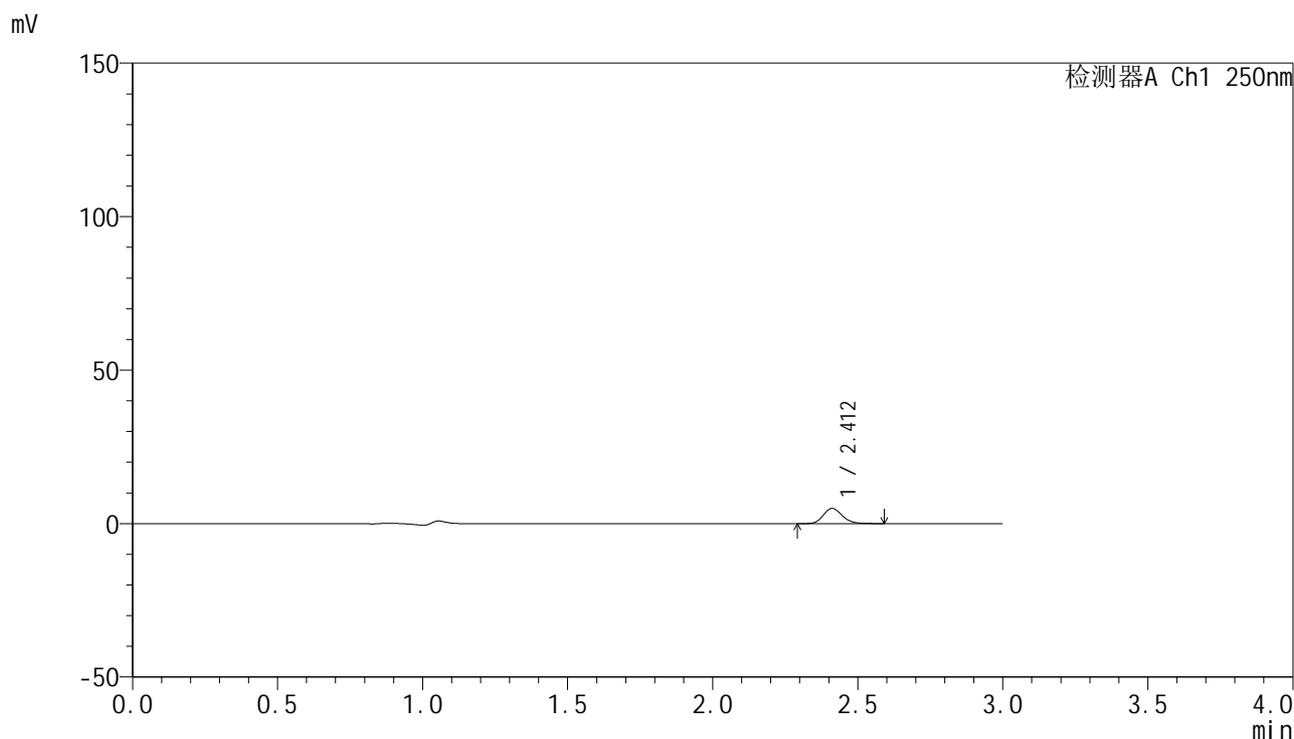

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.412	22554	100.000	4976	6670	1.176	--
总计		22554	100.000	4976			

图18 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1653-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 17:59:11 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:35:59 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

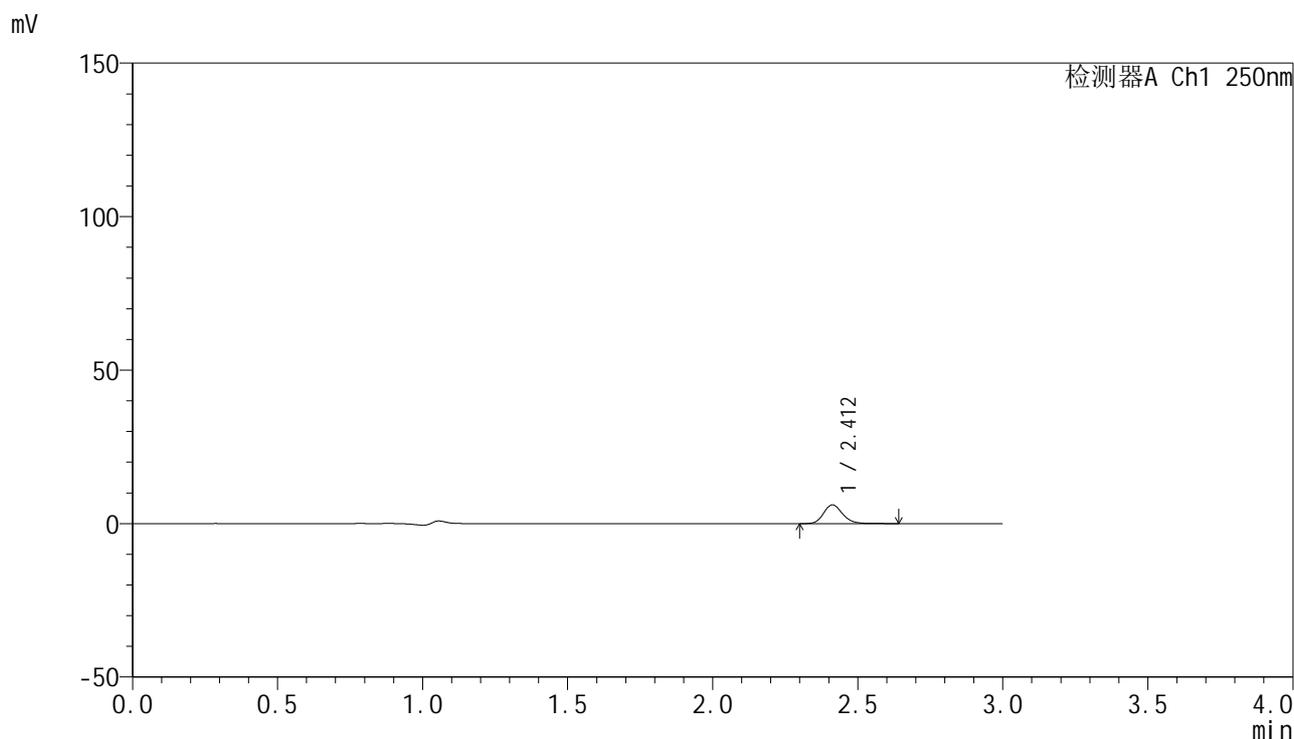

<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.412	27782	100.000	6117	6716	1.177	--
总计		27782	100.000	6117			

图19 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1654-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 18:02:34 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:02 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

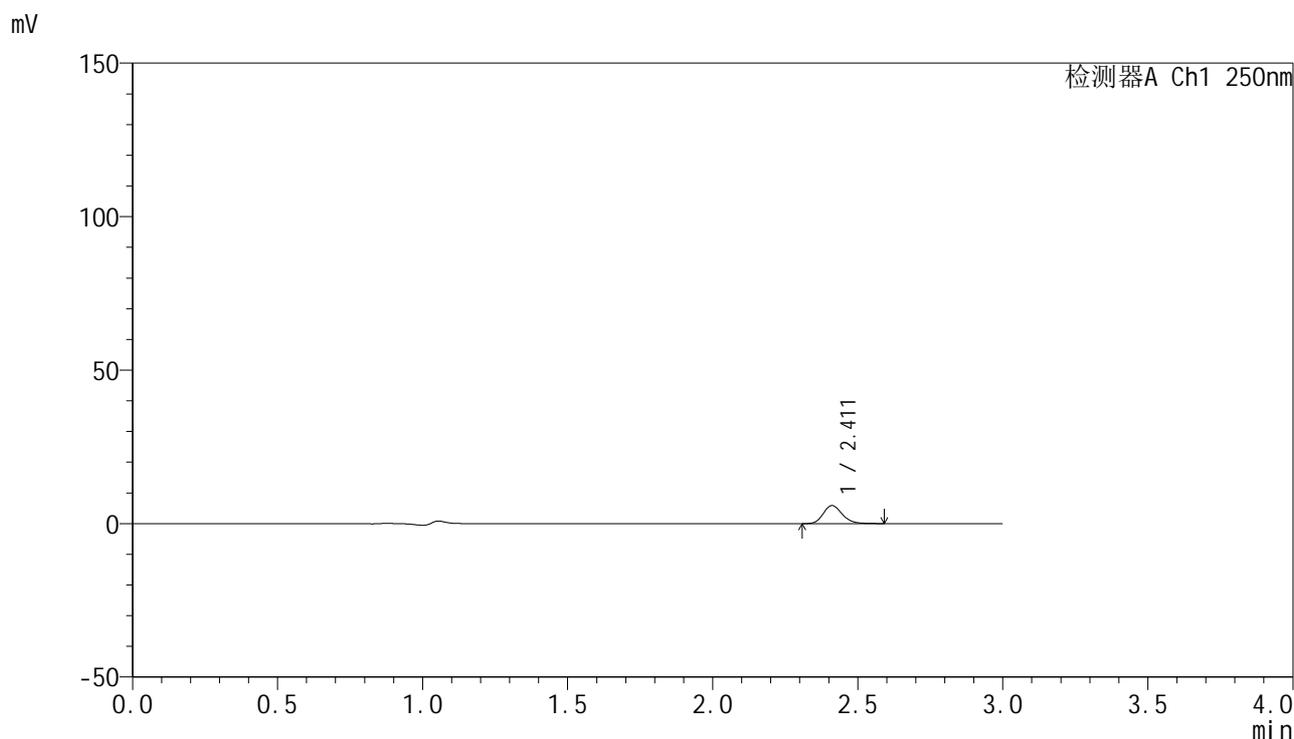

<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.411	26769	100.000	5880	6662	1.189	--
总计		26769	100.000	5880			

图20 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1655-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 18:05:56 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:04 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

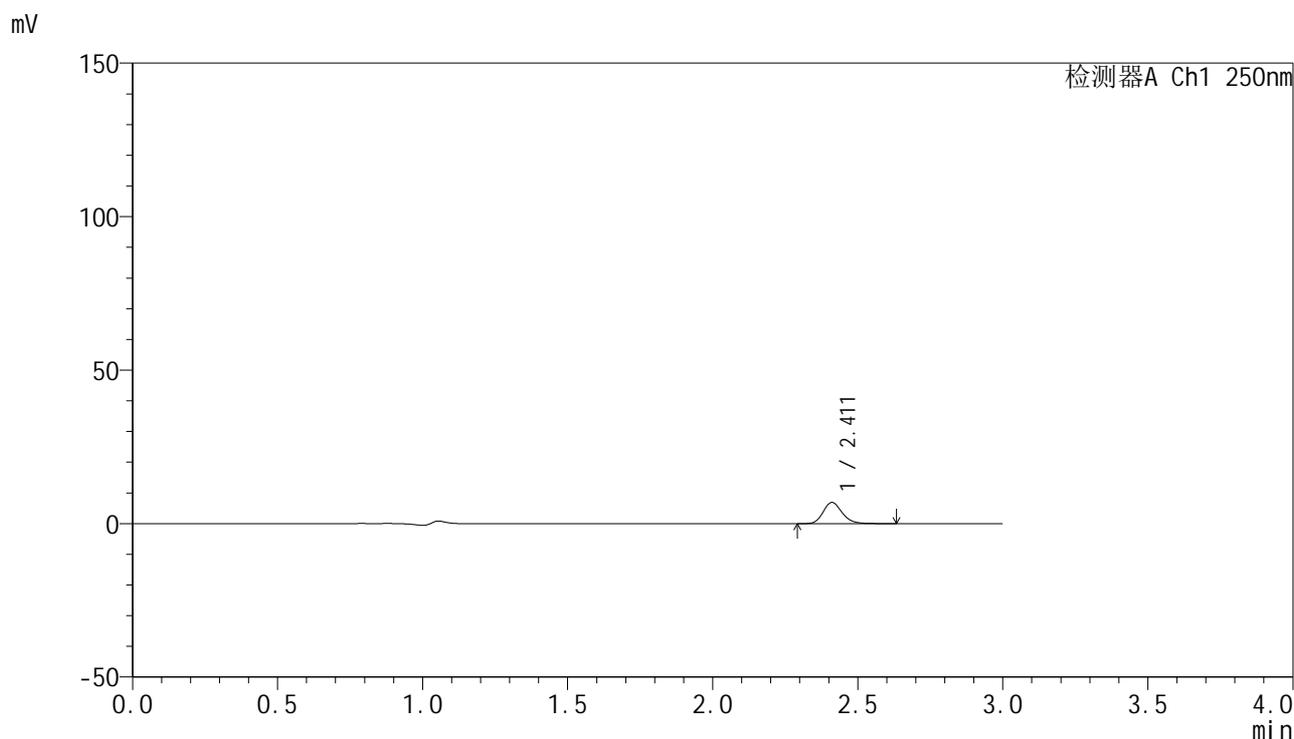

<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.411	31467	100.000	6895	6687	1.184	--
总计		31467	100.000	6895			

图21 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1656-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 18:09:18 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:07 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

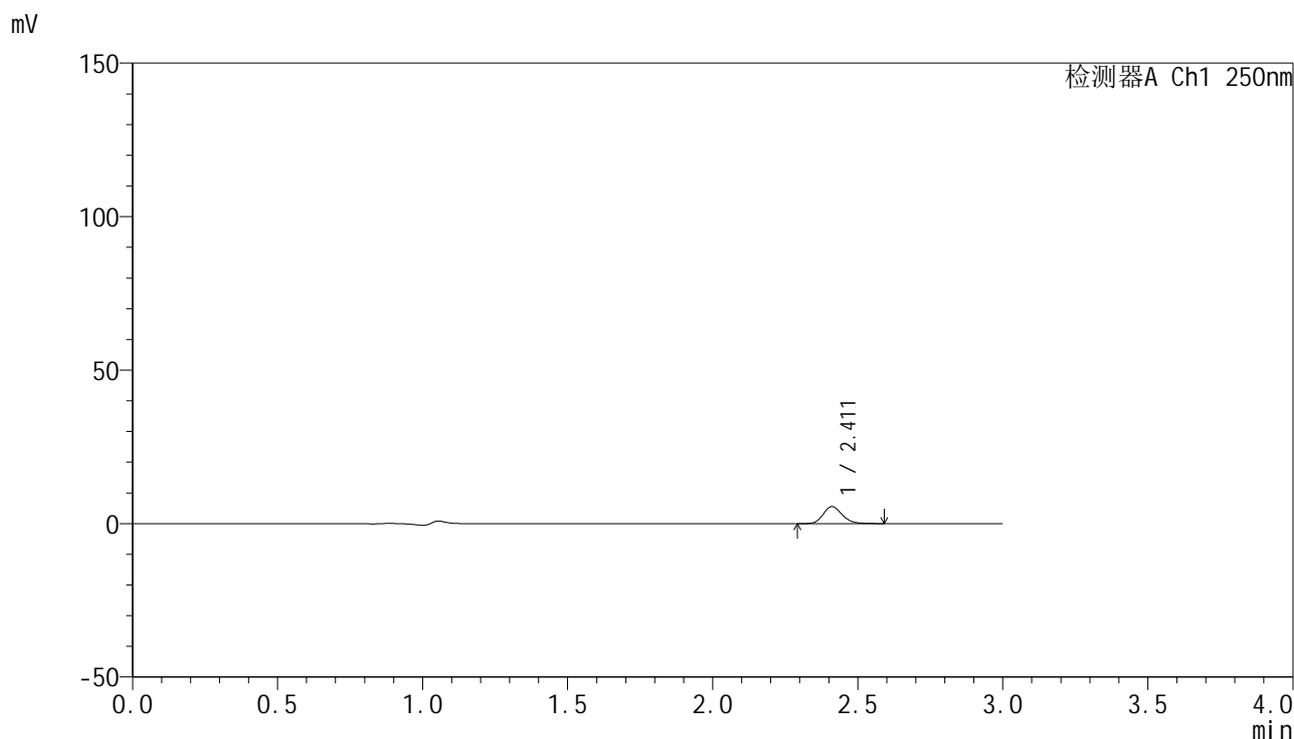

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.411	24992	100.000	5531	6705	1.172	--
总计		24992	100.000	5531			

图22 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1657-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 18:12:40 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:10 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

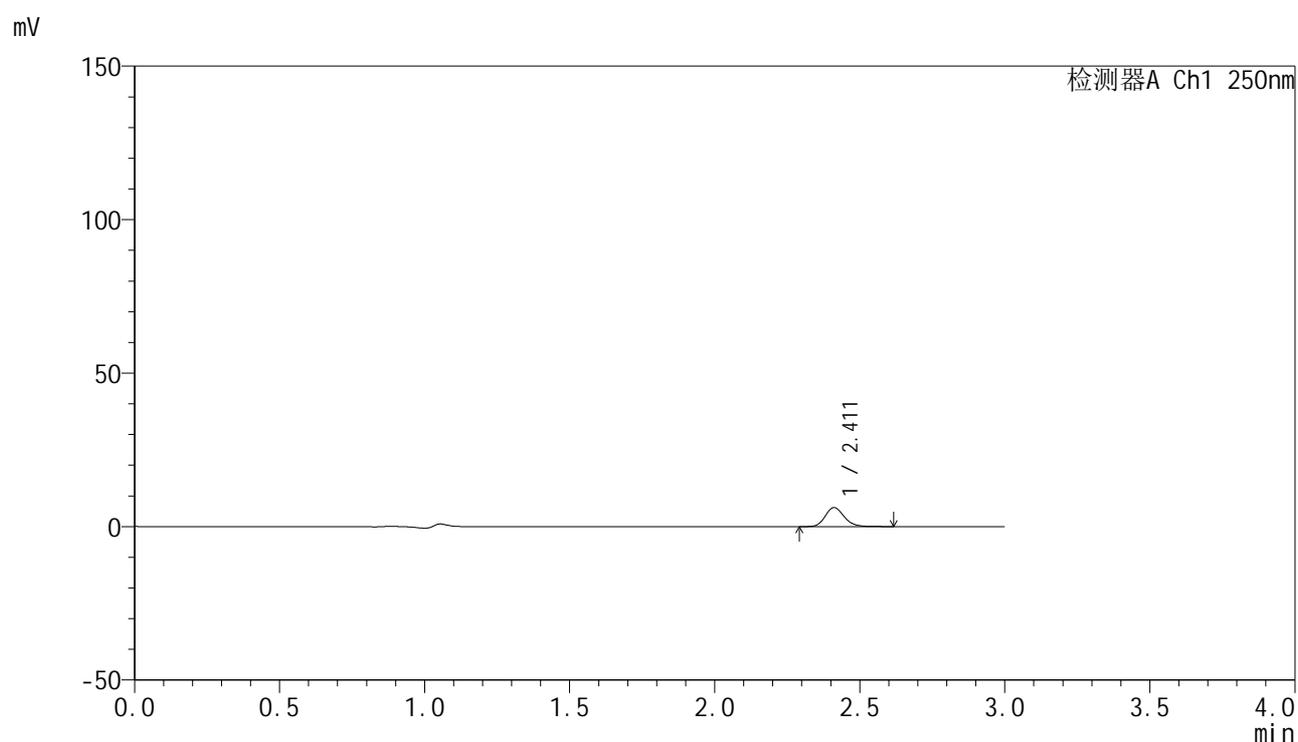

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.411	28122	100.000	6198	6707	1.182	--
总计		28122	100.000	6198			

图23 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1658-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 18:16:02 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:13 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

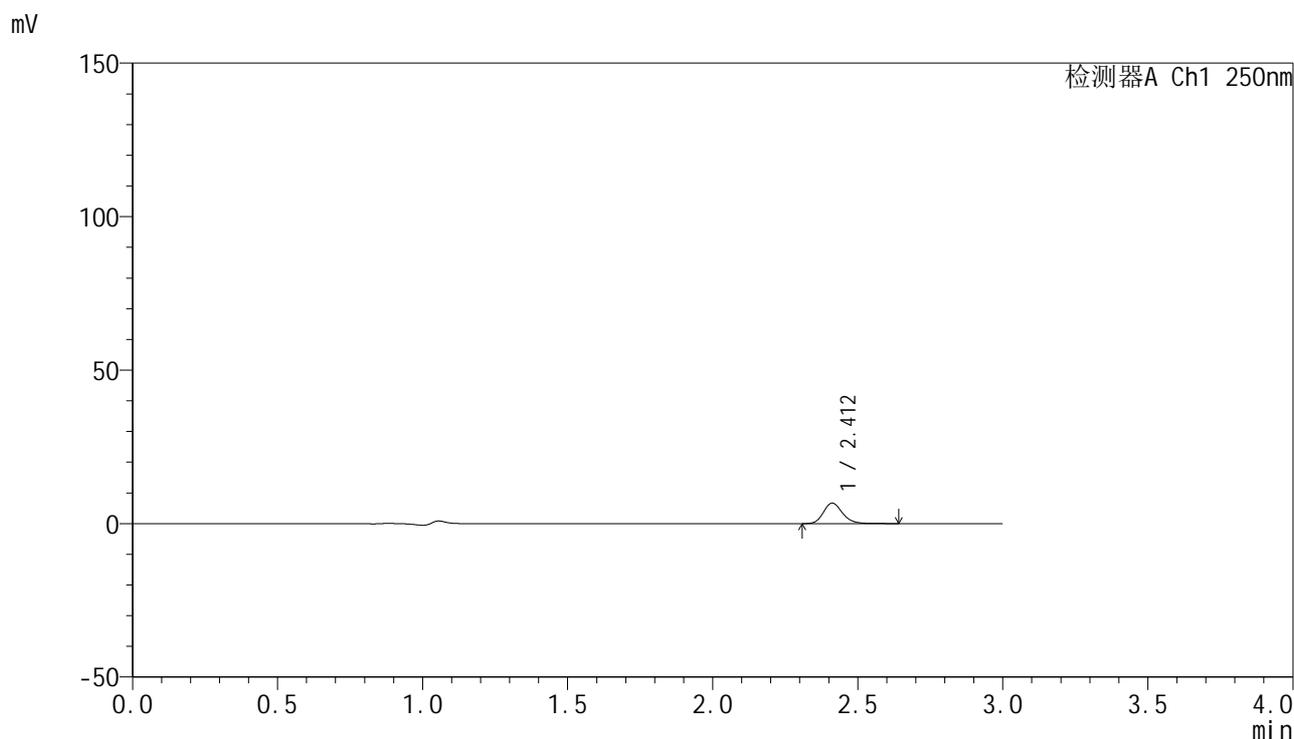

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.412	30608	100.000	6695	6695	1.192	--
总计		30608	100.000	6695			

图24 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1659-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 18:19:24 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:15 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

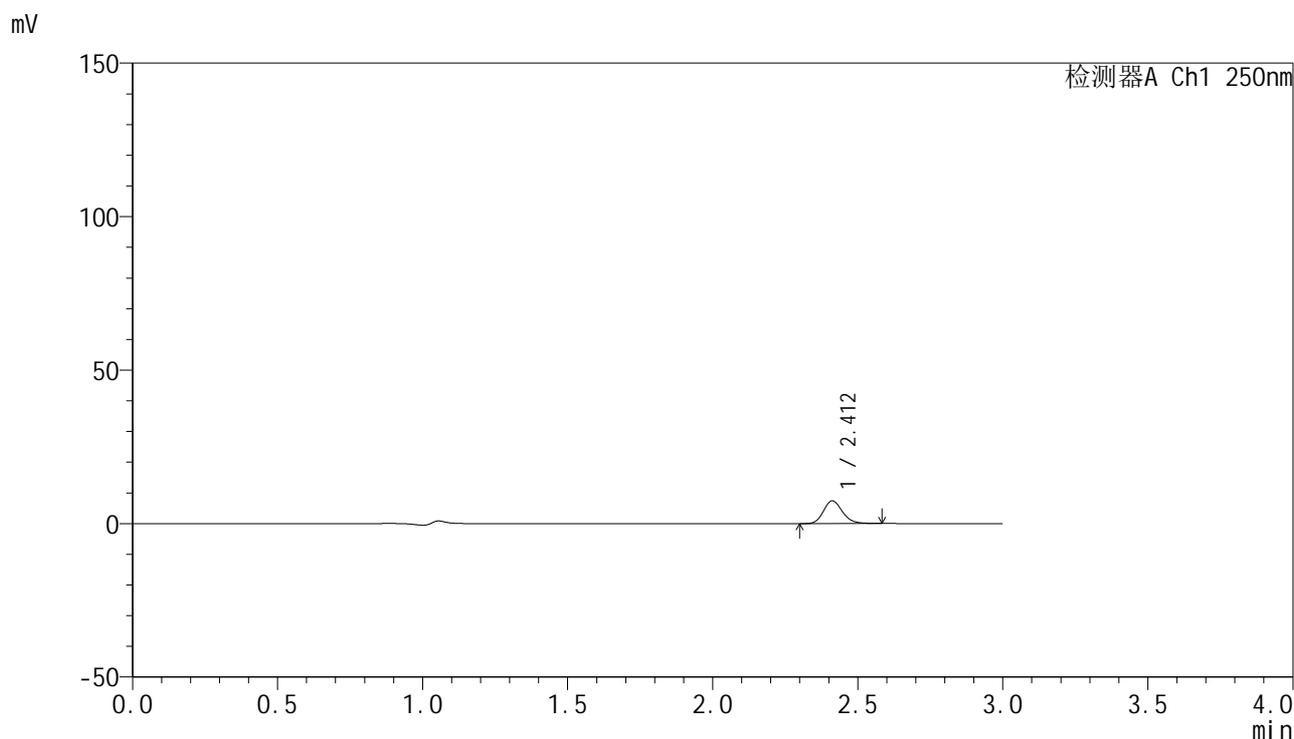

<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.412	33501	100.000	7404	6713	1.176	--
总计		33501	100.000	7404			

图25 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1660-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 18:22:46 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:18 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

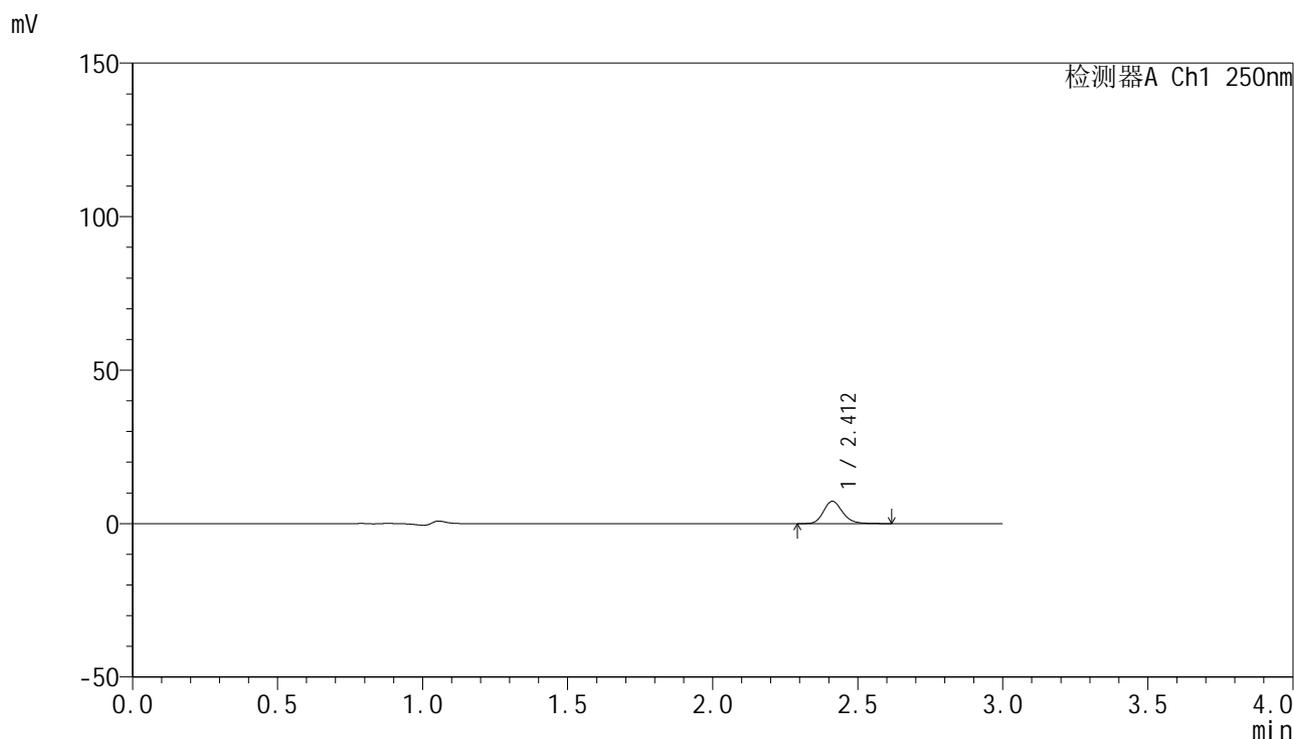

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.412	33183	100.000	7291	6696	1.188	--
总计		33183	100.000	7291			

图26 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1661-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 18:26:08 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:21 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

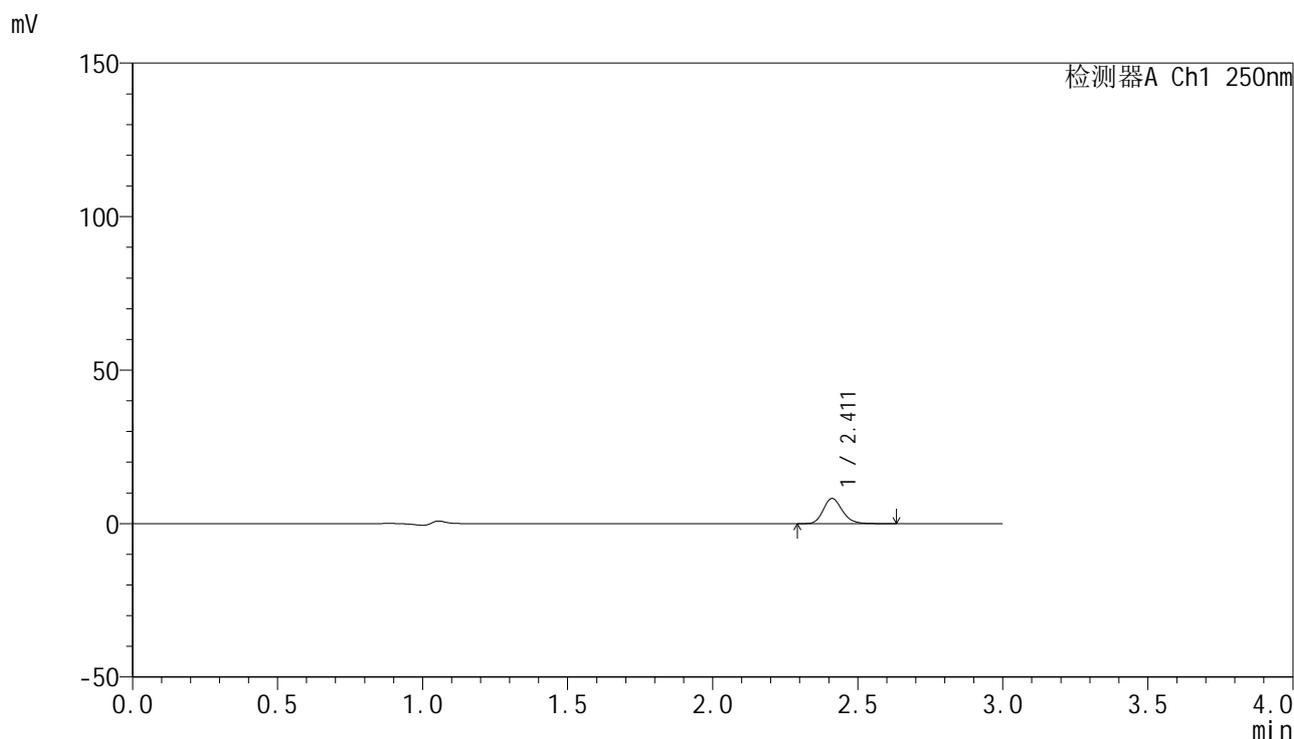

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.411	37279	100.000	8201	6682	1.190	--
总计		37279	100.000	8201			

图27 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1662-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 18:29:30 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:24 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

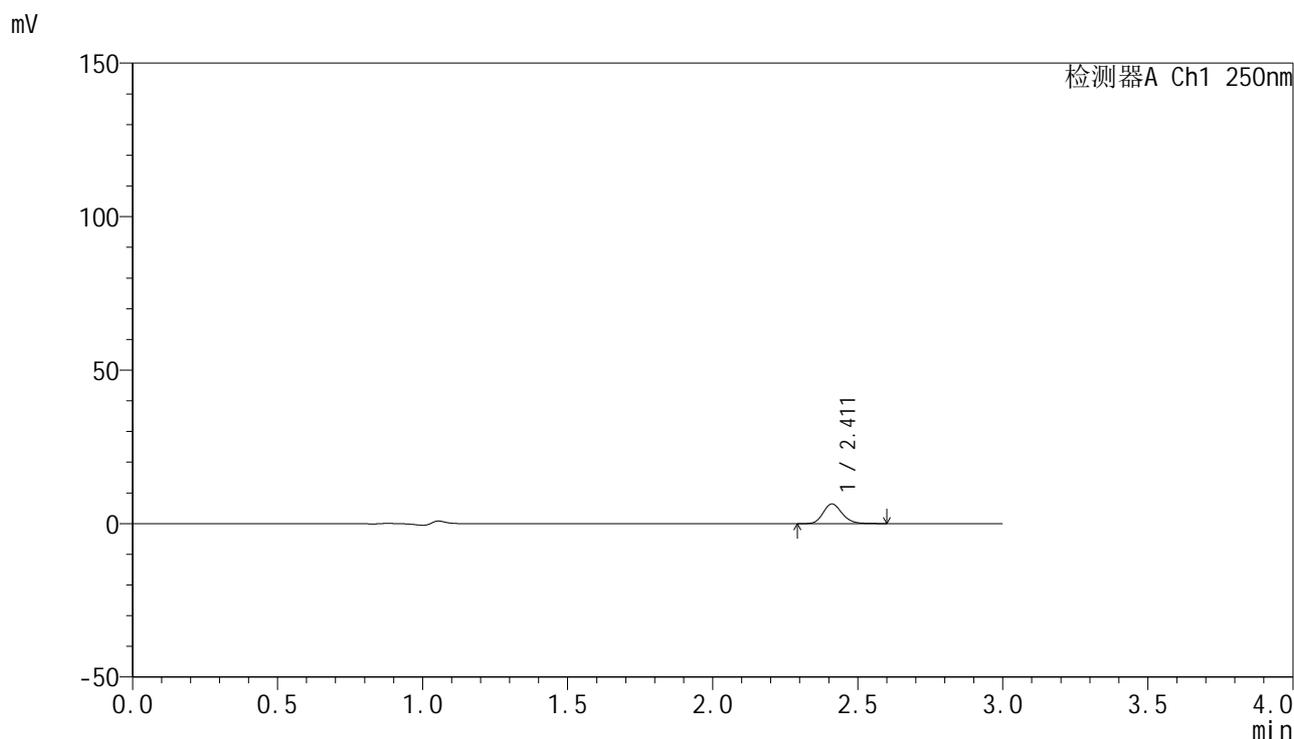

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.411	29106	100.000	6413	6700	1.178	--
总计		29106	100.000	6413			

图28 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1663-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 18:32:52 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:27 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

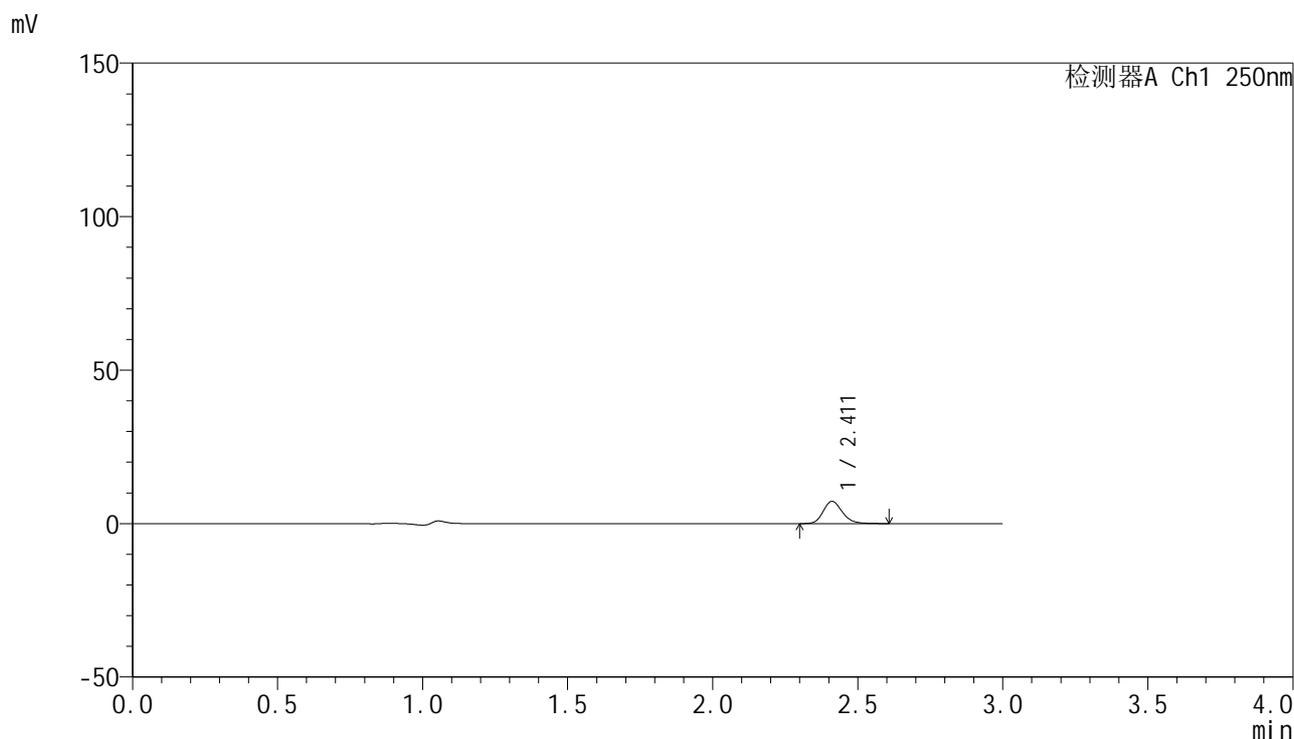

<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.411	33011	100.000	7246	6657	1.190	--
总计		33011	100.000	7246			

图29 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1664-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 18:36:15 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:30 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

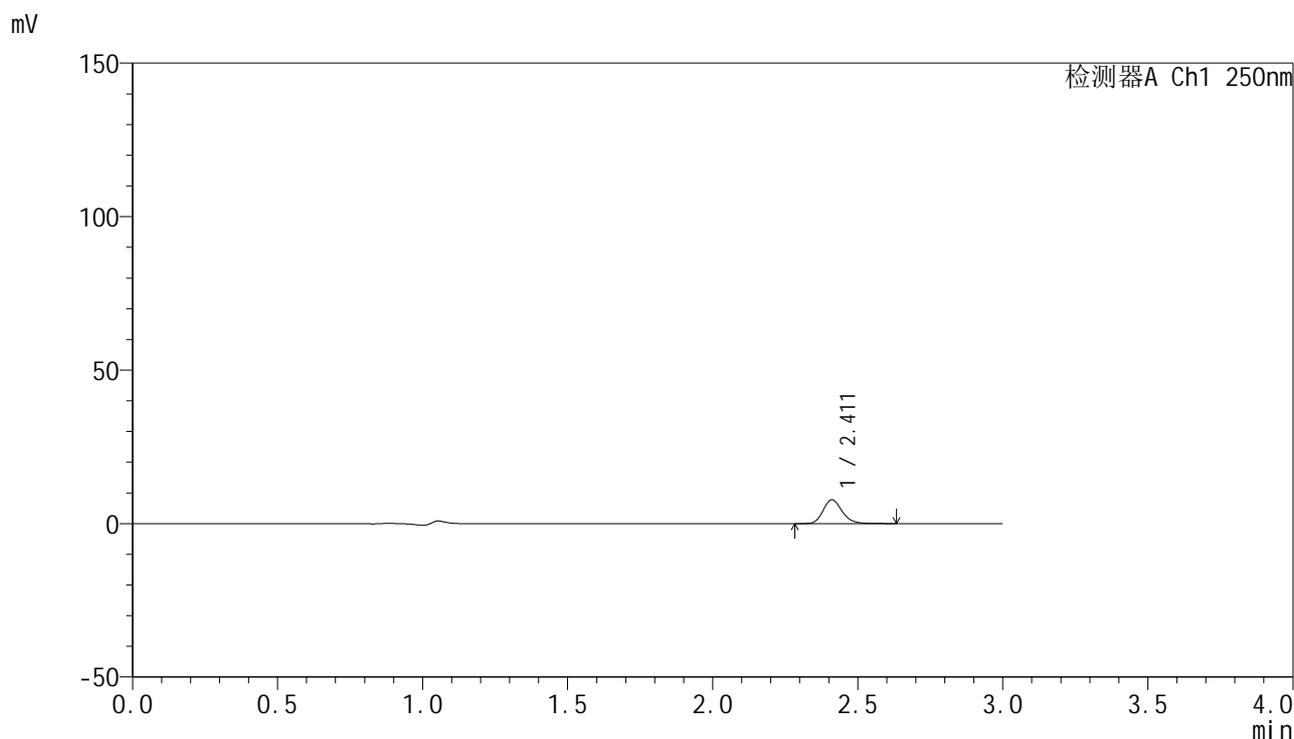

<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.411	35399	100.000	7739	6674	1.195	--
总计		35399	100.000	7739			

图30 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1665-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 18:39:37 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:33 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

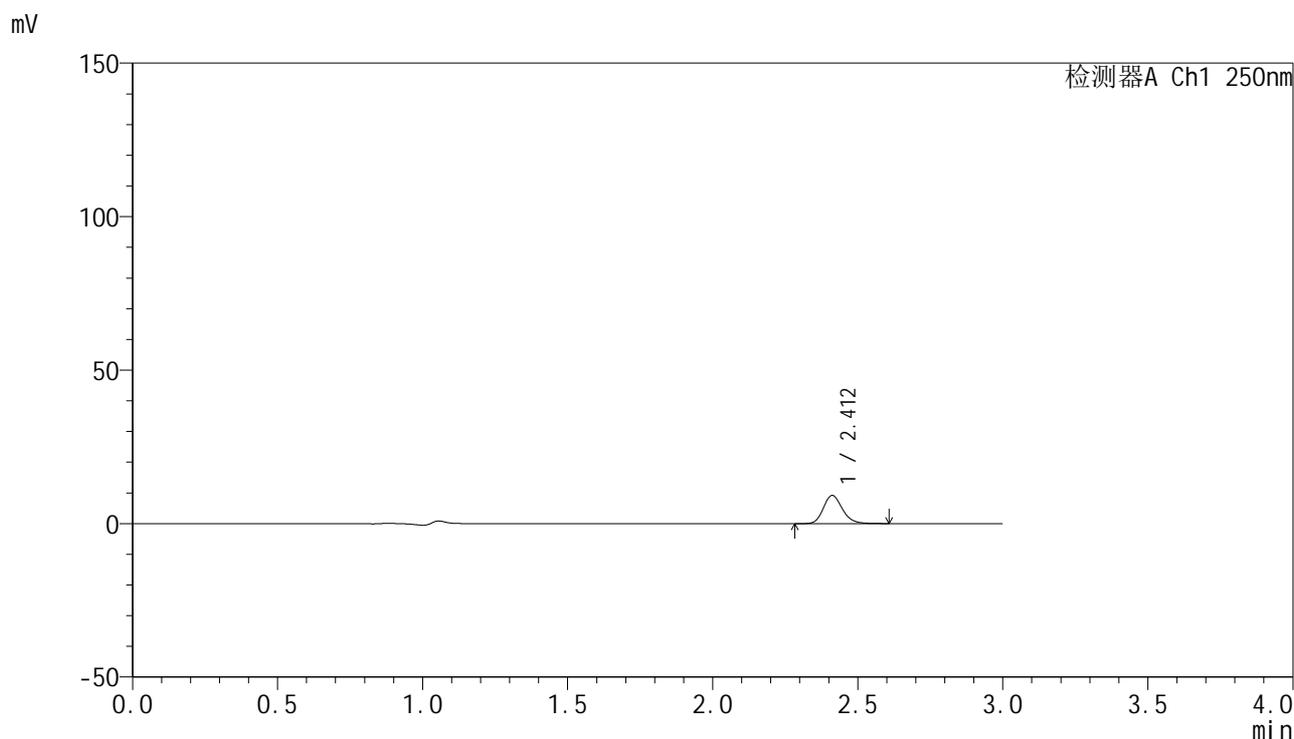

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.412	41678	100.000	9171	6699	1.188	--
总计		41678	100.000	9171			

图31 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1666-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 18:42:59 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:36 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

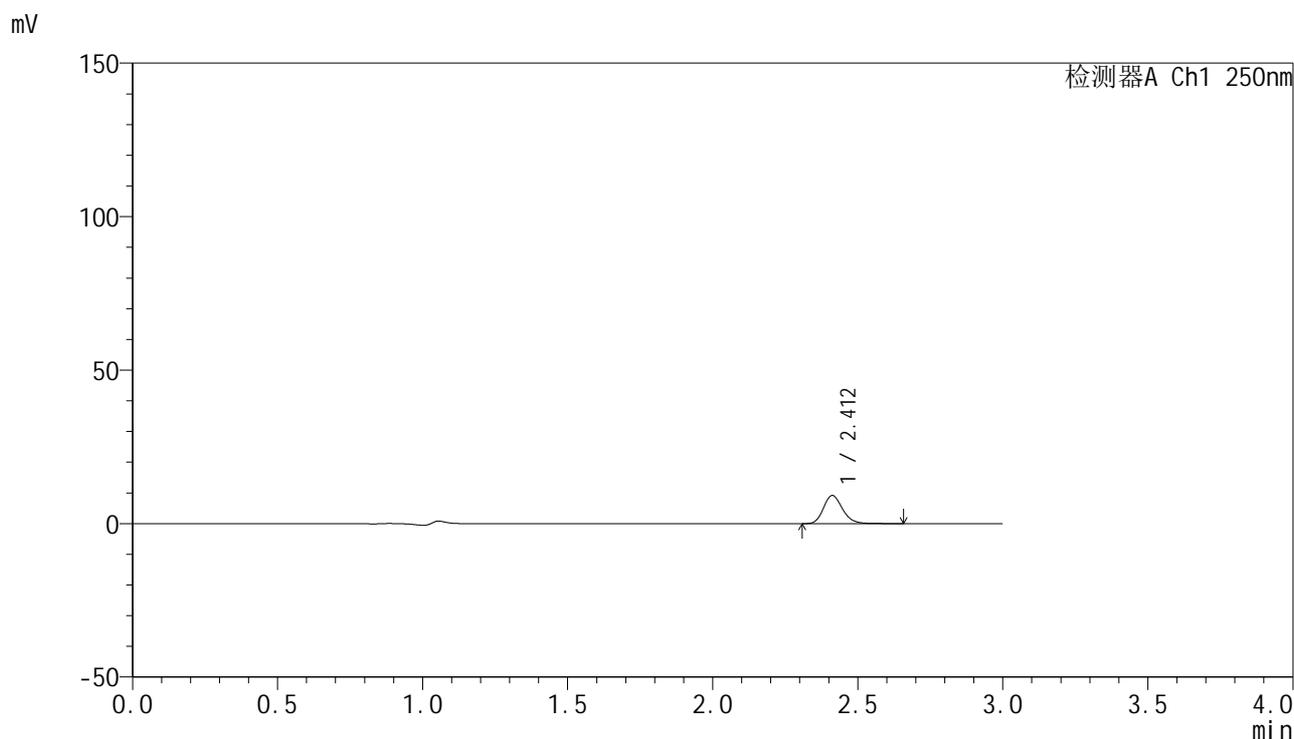

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.412	41987	100.000	9184	6637	1.192	--
总计		41987	100.000	9184			

图32 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1667-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 18:46:21 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:39 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

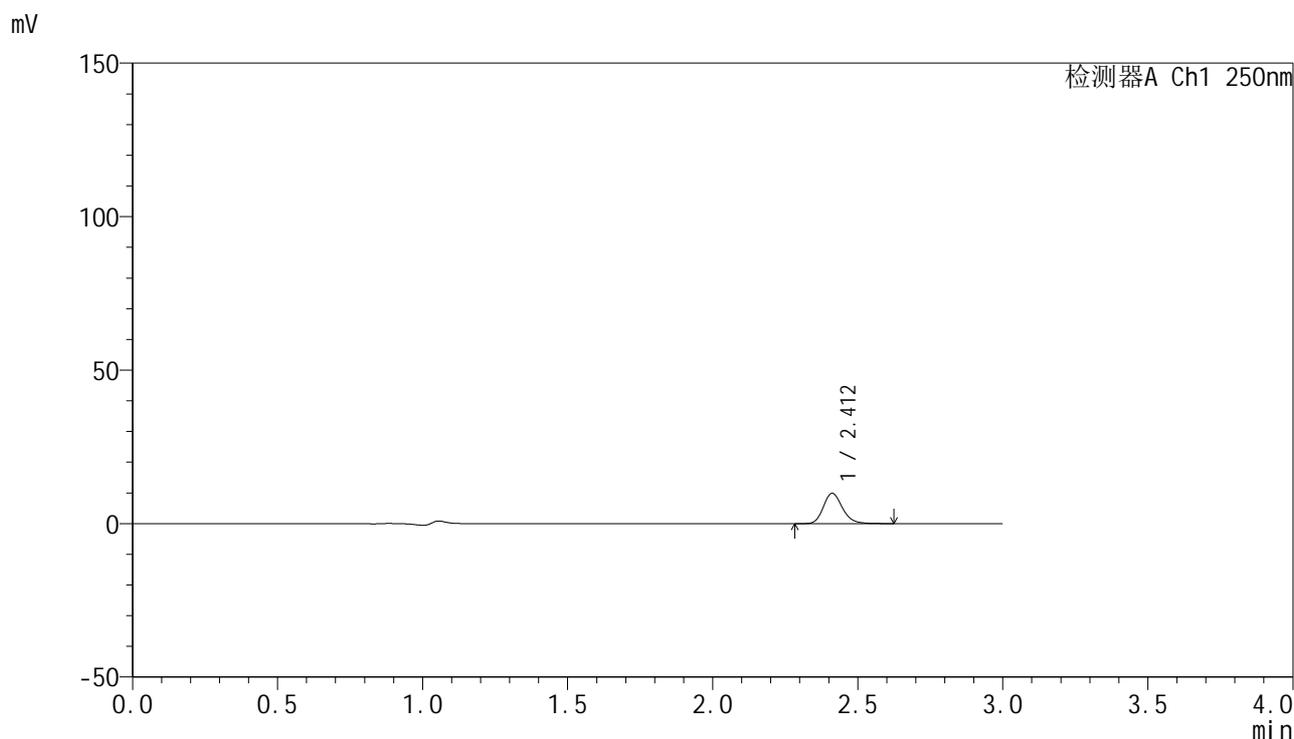

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.412	45025	100.000	9888	6696	1.189	--
总计		45025	100.000	9888			

图33 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1668-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 18:49:42 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:42 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

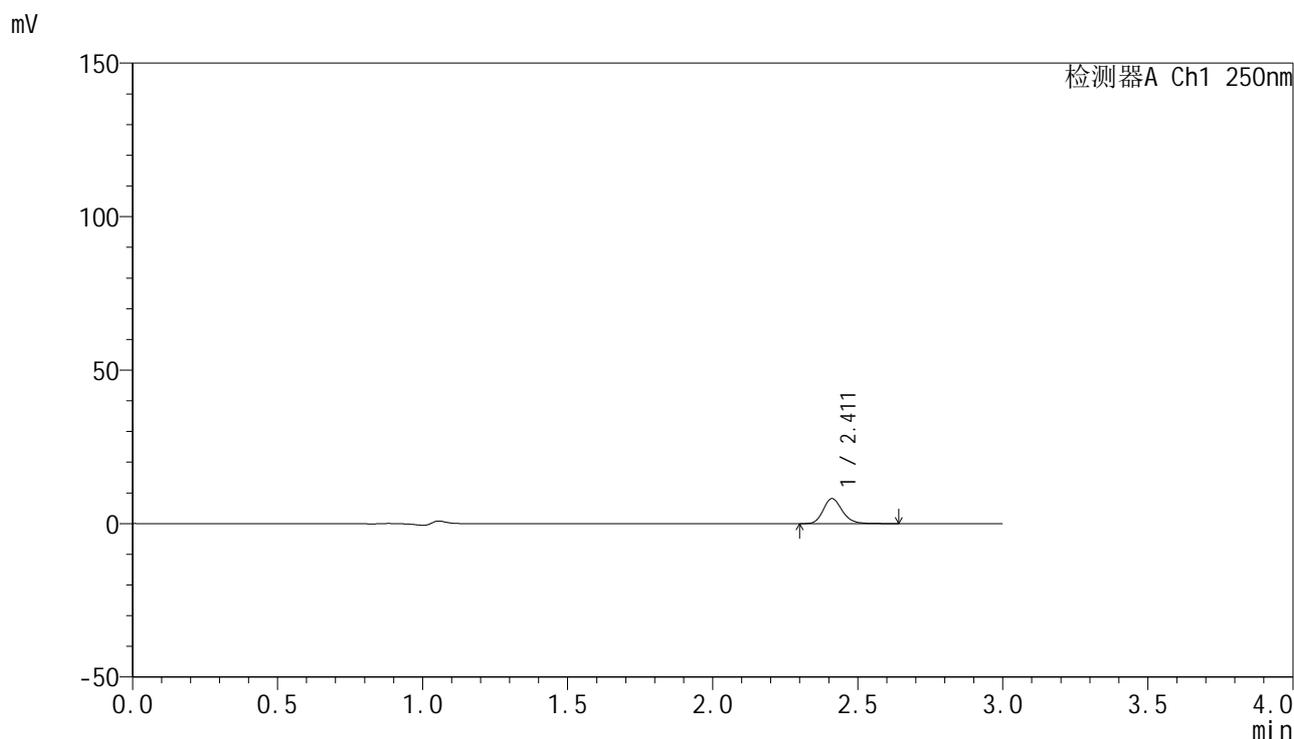

<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.411	37135	100.000	8144	6689	1.183	--
总计		37135	100.000	8144			

图34 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1669-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 18:53:03 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:45 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

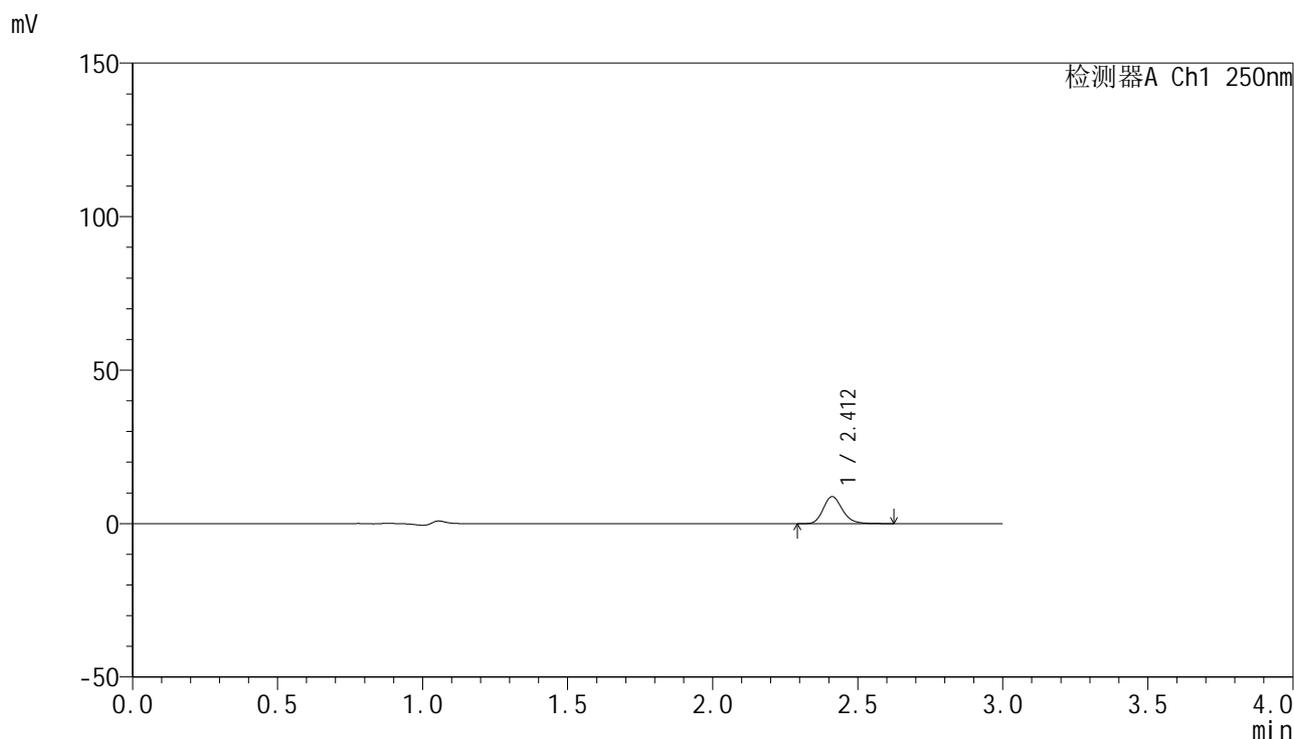

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.412	40140	100.000	8815	6666	1.189	--
总计		40140	100.000	8815			

图35 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1670-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 18:56:25 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:48 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

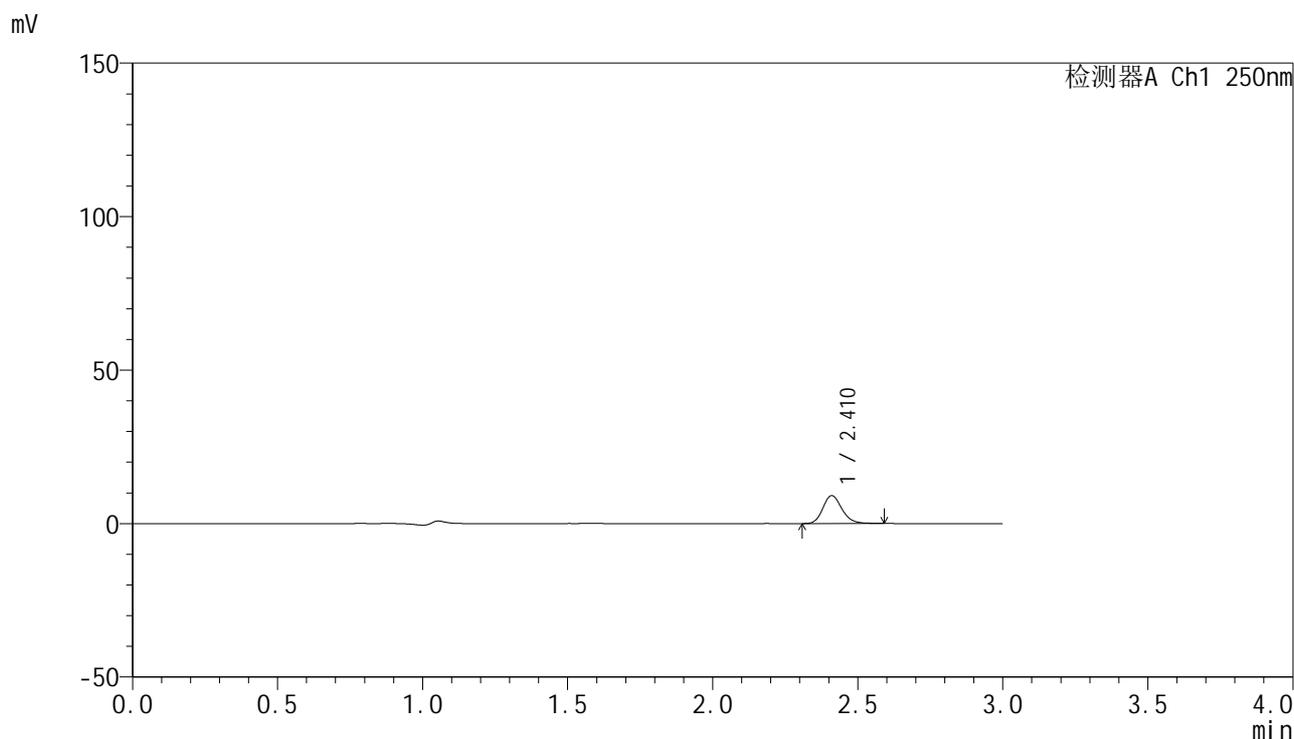

<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.410	41409	100.000	9059	6643	1.186	--
总计		41409	100.000	9059			

图36 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1671-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 18:59:47 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

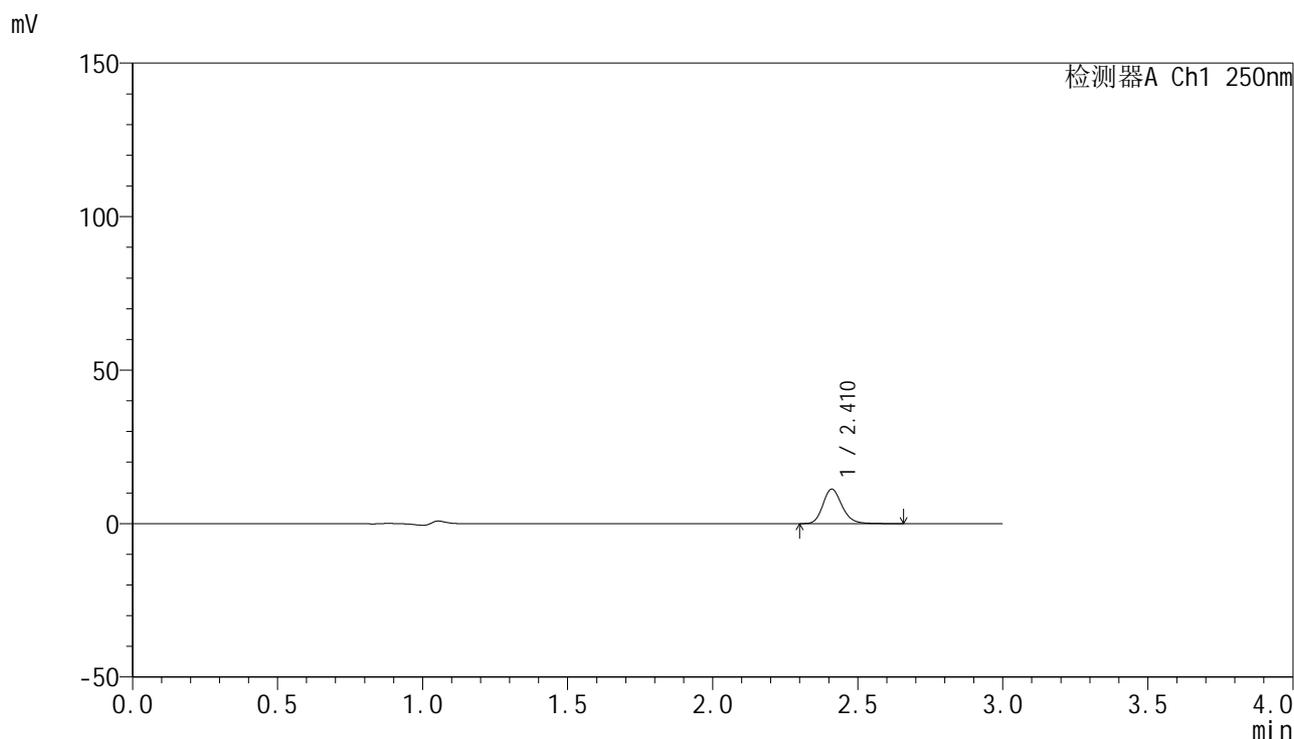

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.410	51397	100.000	11187	6648	1.189	--
总计		51397	100.000	11187			

图37 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1672-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 19:03:09 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

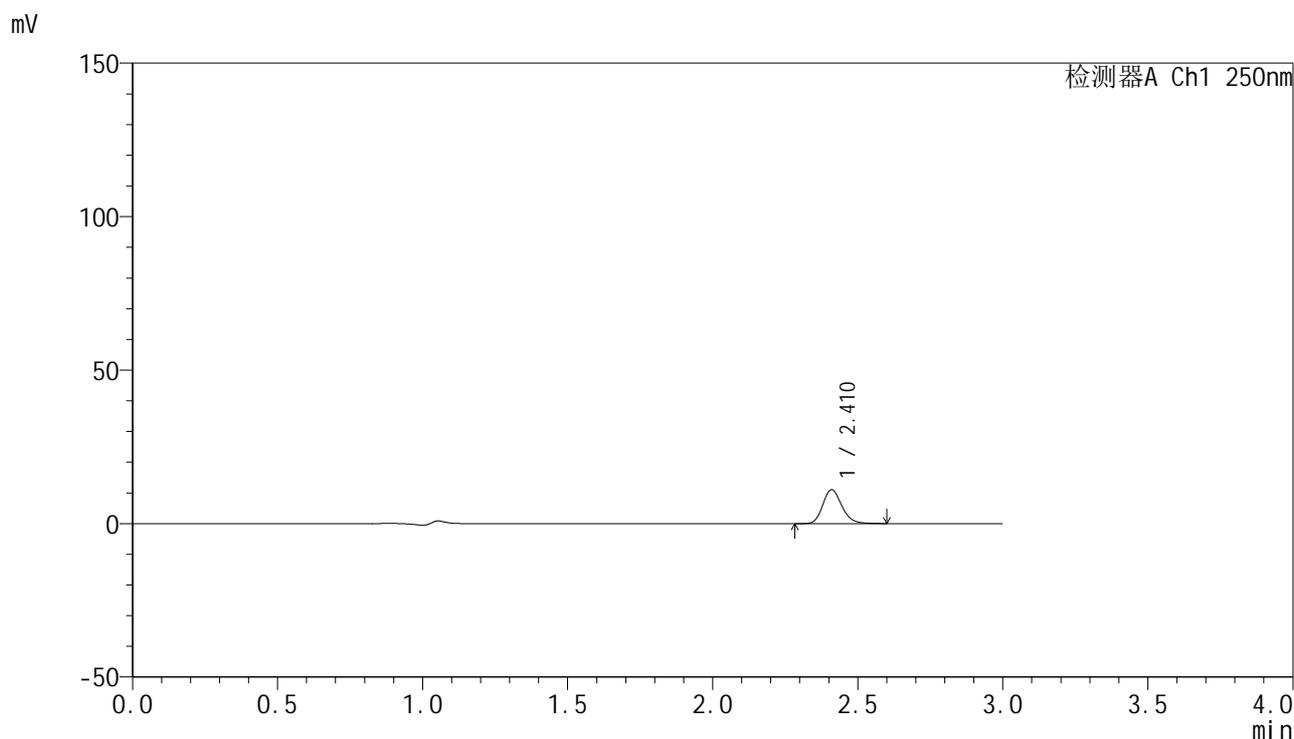

<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.410	50129	100.000	10966	6654	1.187	--
总计		50129	100.000	10966			

图38 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1673-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 19:06:31 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:56 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

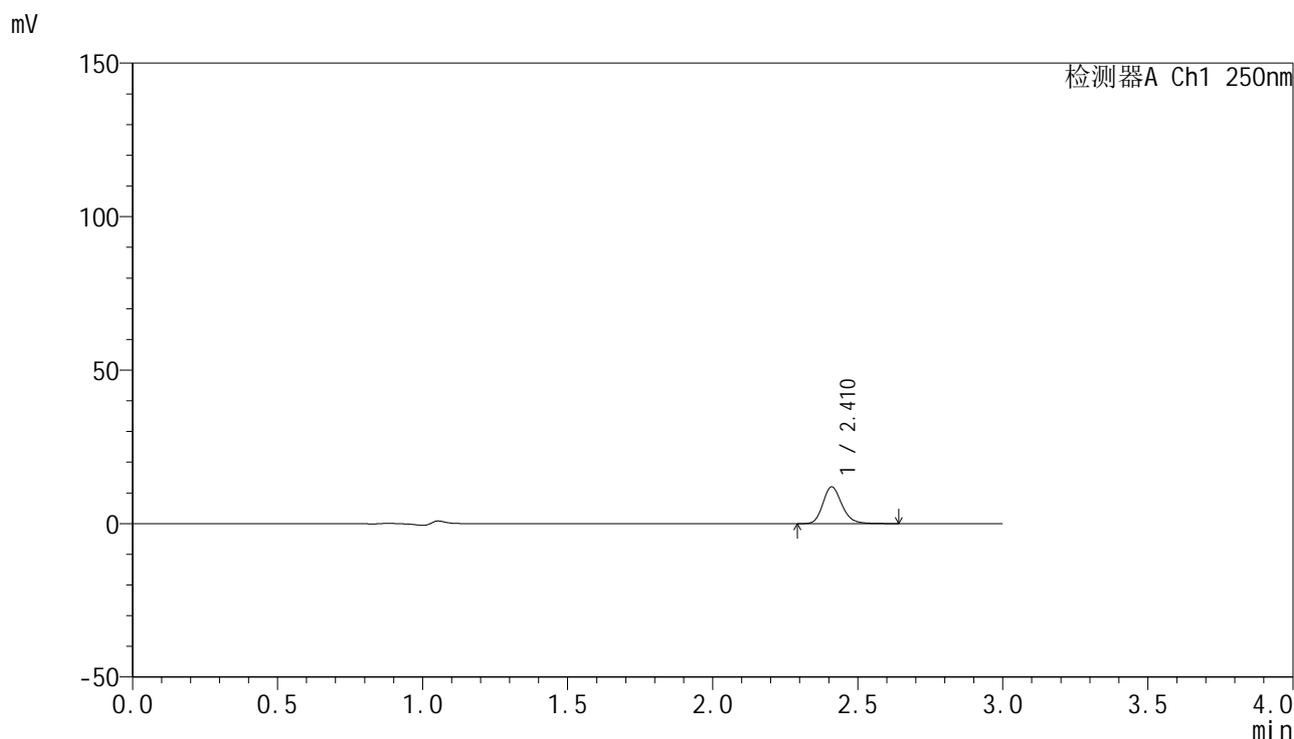

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.410	54322	100.000	11905	6732	1.190	--
总计		54322	100.000	11905			

图39 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1674-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 19:09:53 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:36:59 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

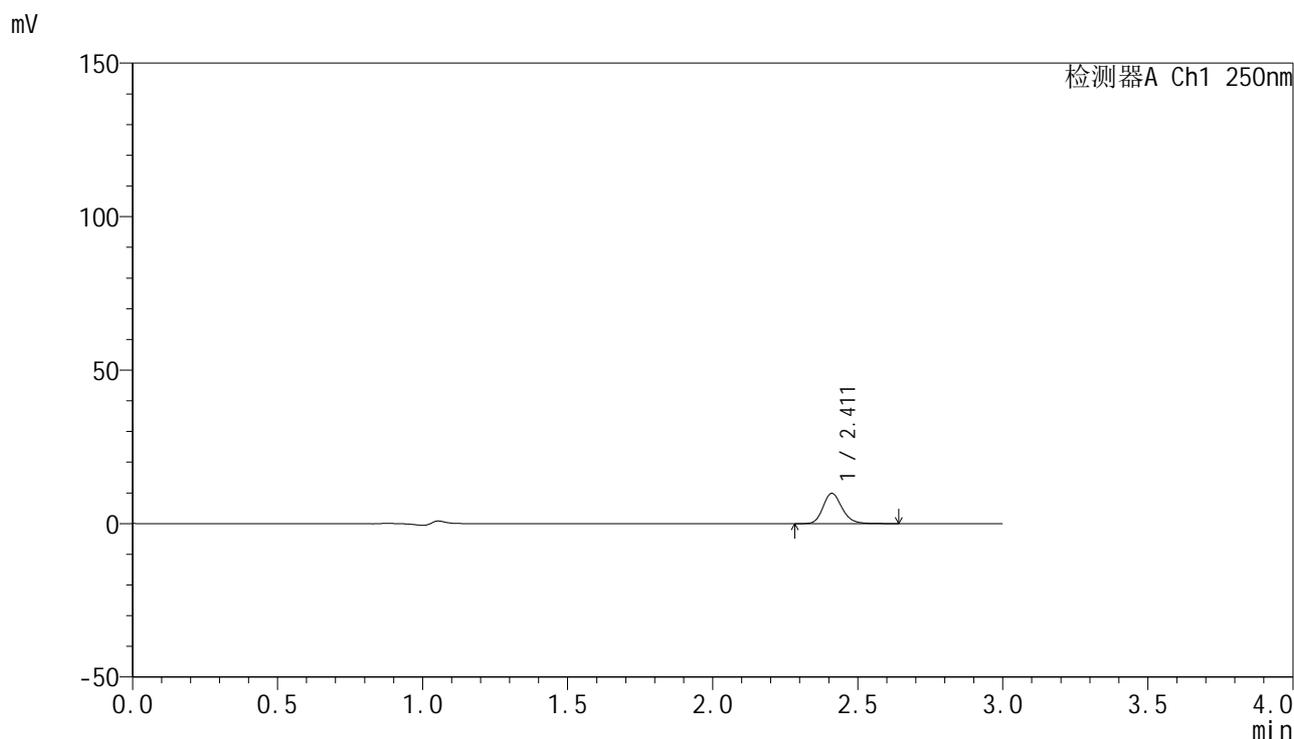

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.411	45084	100.000	9848	6702	1.186	--
总计		45084	100.000	9848			

图40 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1675-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 19:13:14 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:37:02 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

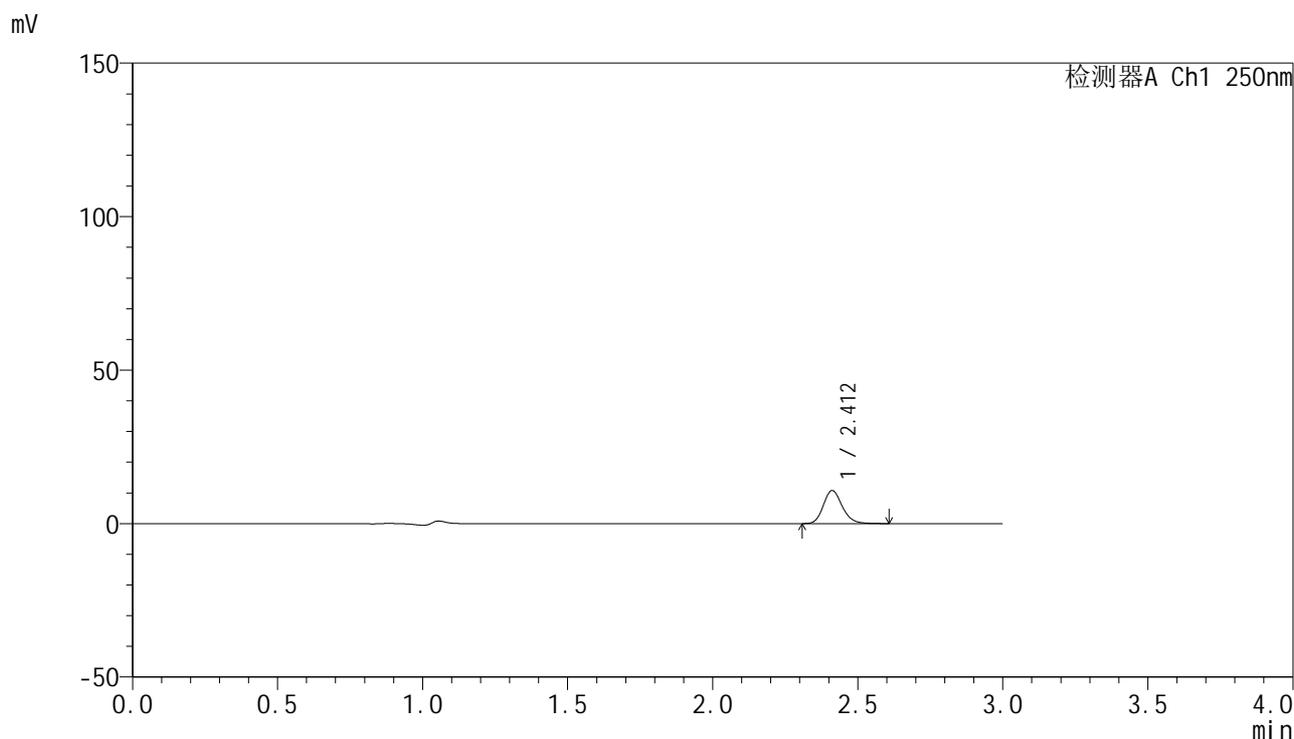

<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.412	48599	100.000	10751	6747	1.182	--
总计		48599	100.000	10751			

图41 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1676-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 19:16:36 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:37:05 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

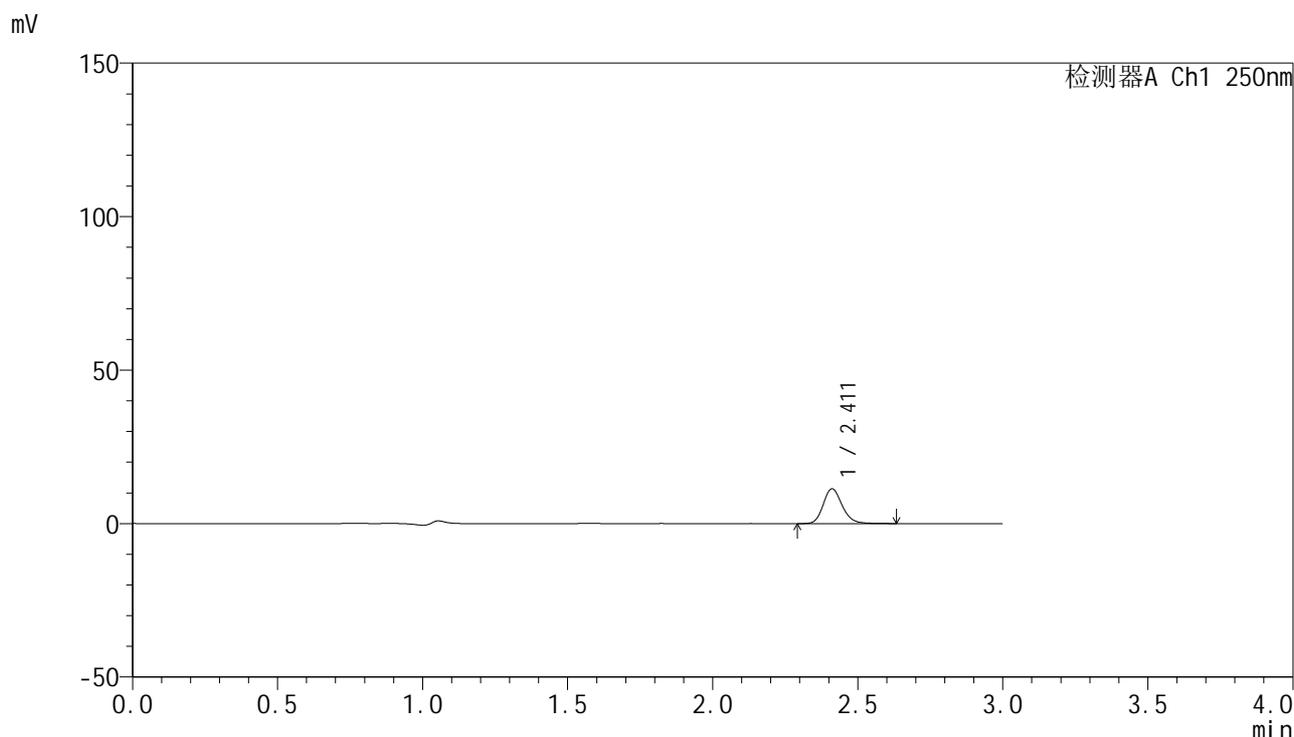

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.411	51383	100.000	11320	6732	1.180	--
总计		51383	100.000	11320			

图42 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1677-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 19:19:59 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:37:07 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

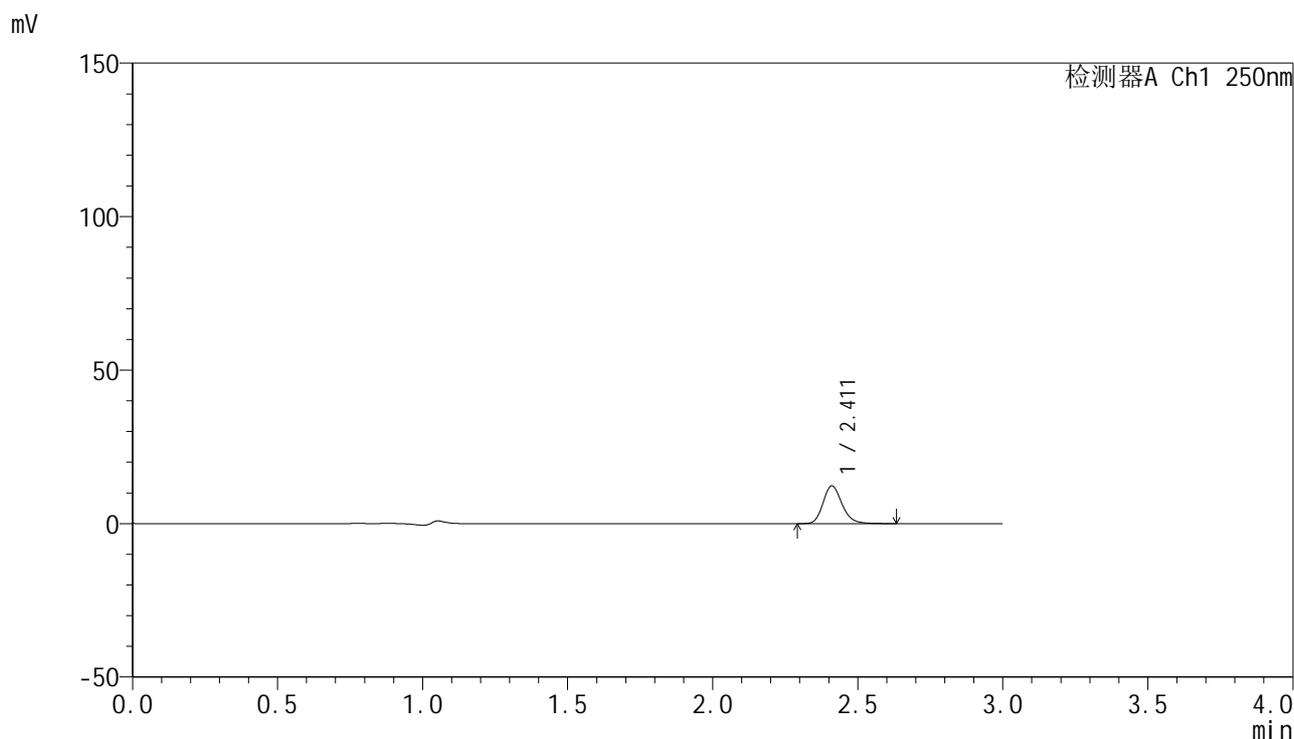

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.411	55758	100.000	12248	6733	1.187	--
总计		55758	100.000	12248			

图43 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1678-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 19:23:21 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:37:10 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

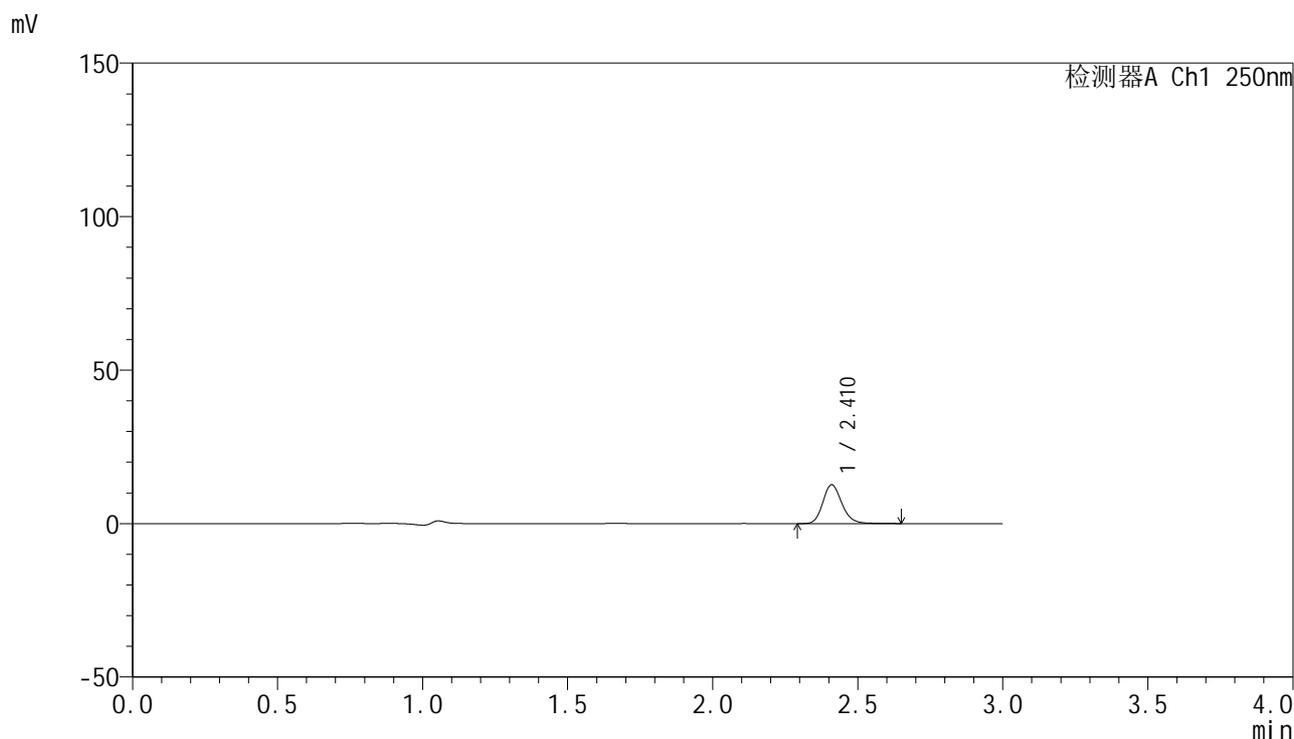

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.410	57340	100.000	12572	6712	1.183	--
总计		57340	100.000	12572			

图44 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1679-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 19:26:43 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:37:13 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

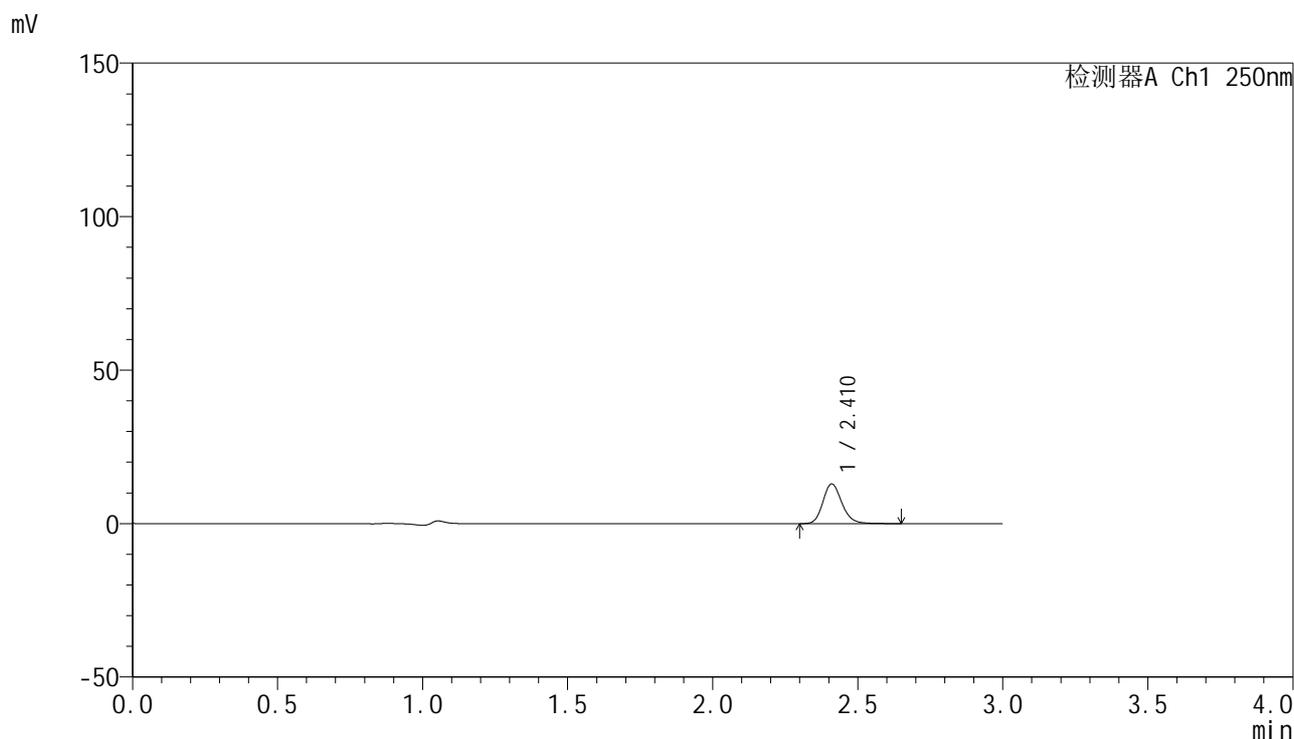

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.410	58673	100.000	12874	6736	1.184	--
总计		58673	100.000	12874			

图45 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1680-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 19:30:05 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:37:16 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

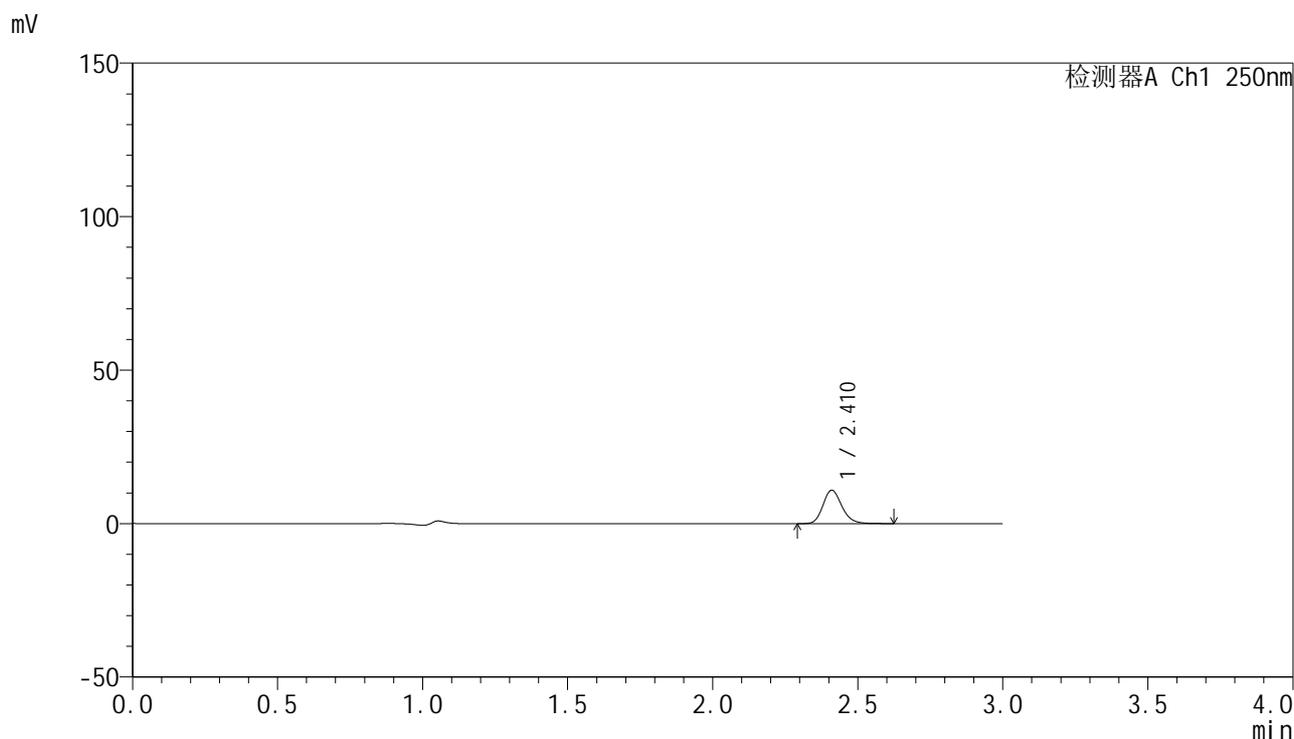

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.410	49452	100.000	10849	6732	1.186	--
总计		49452	100.000	10849			

图46 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1681-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 19:33:27 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:37:18 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

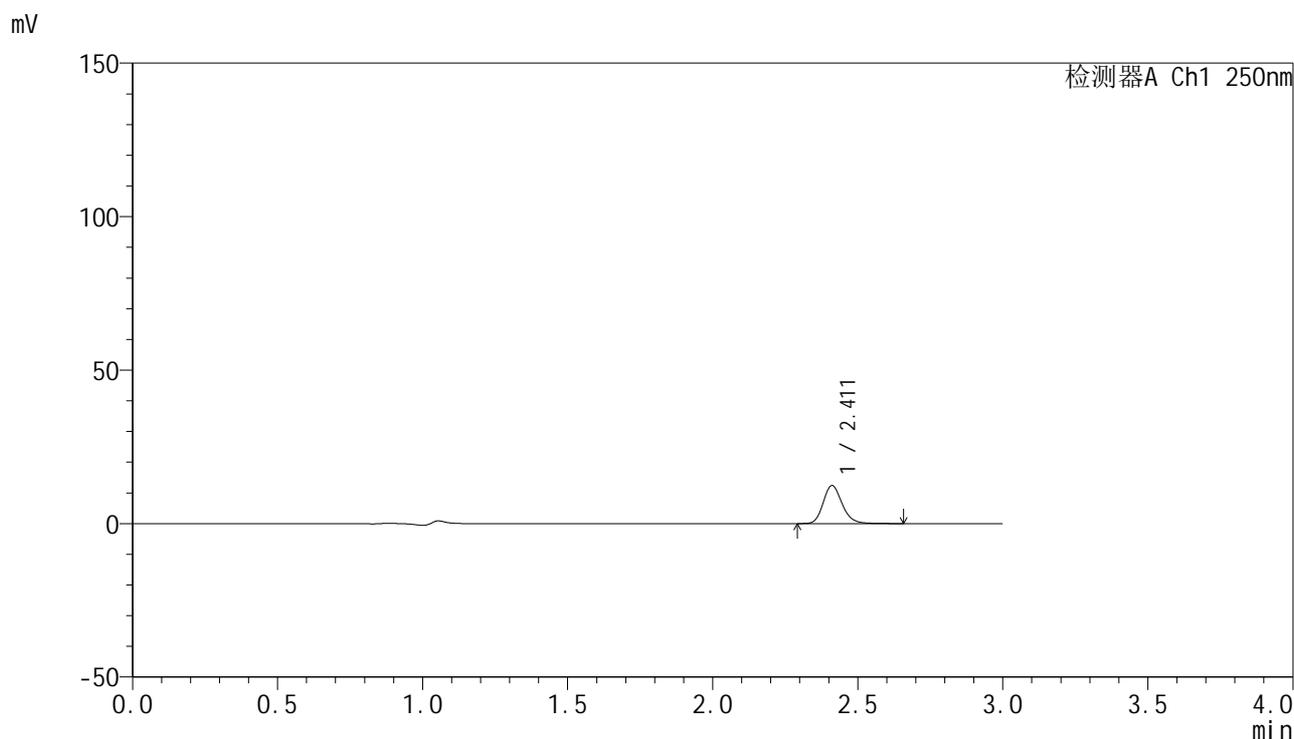

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.411	56149	100.000	12356	6756	1.186	--
总计		56149	100.000	12356			

图47 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1682-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 19:36:48 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:37:21 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

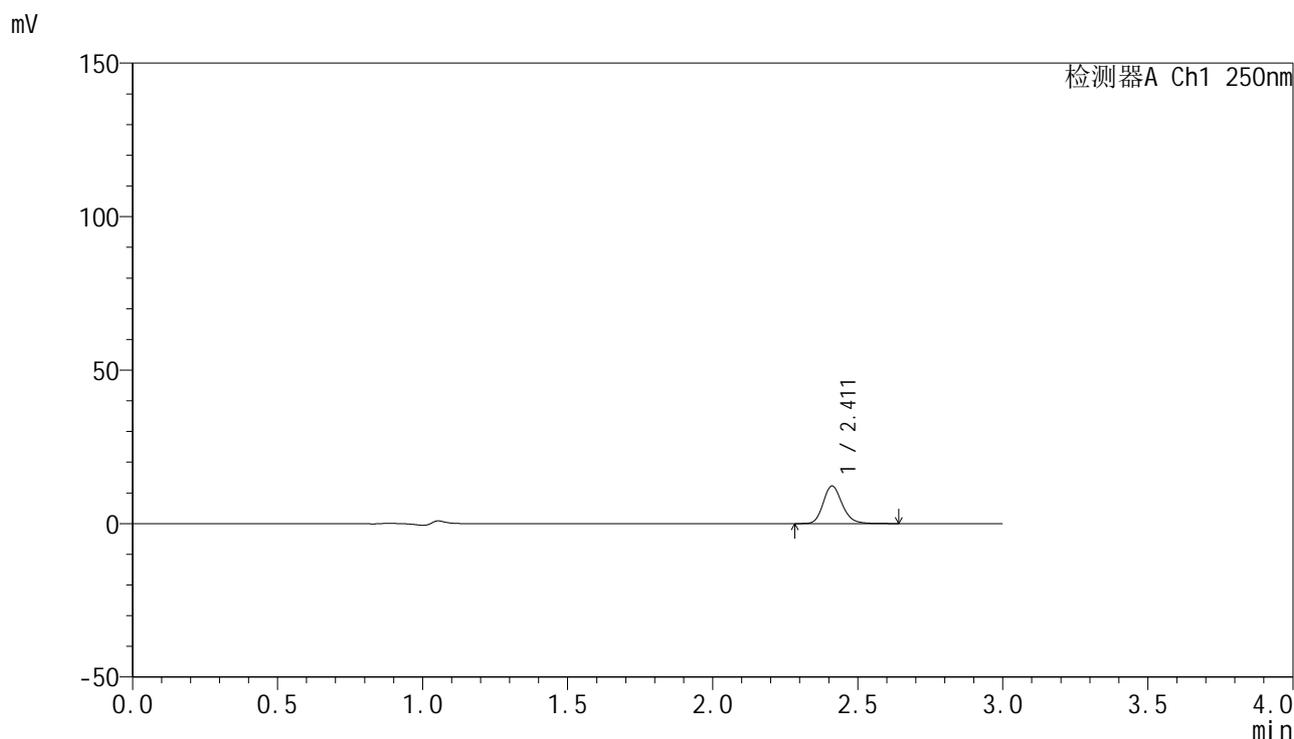

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.411	55477	100.000	12232	6762	1.186	--
总计		55477	100.000	12232			

图48 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1683-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 19:40:11 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:37:24 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

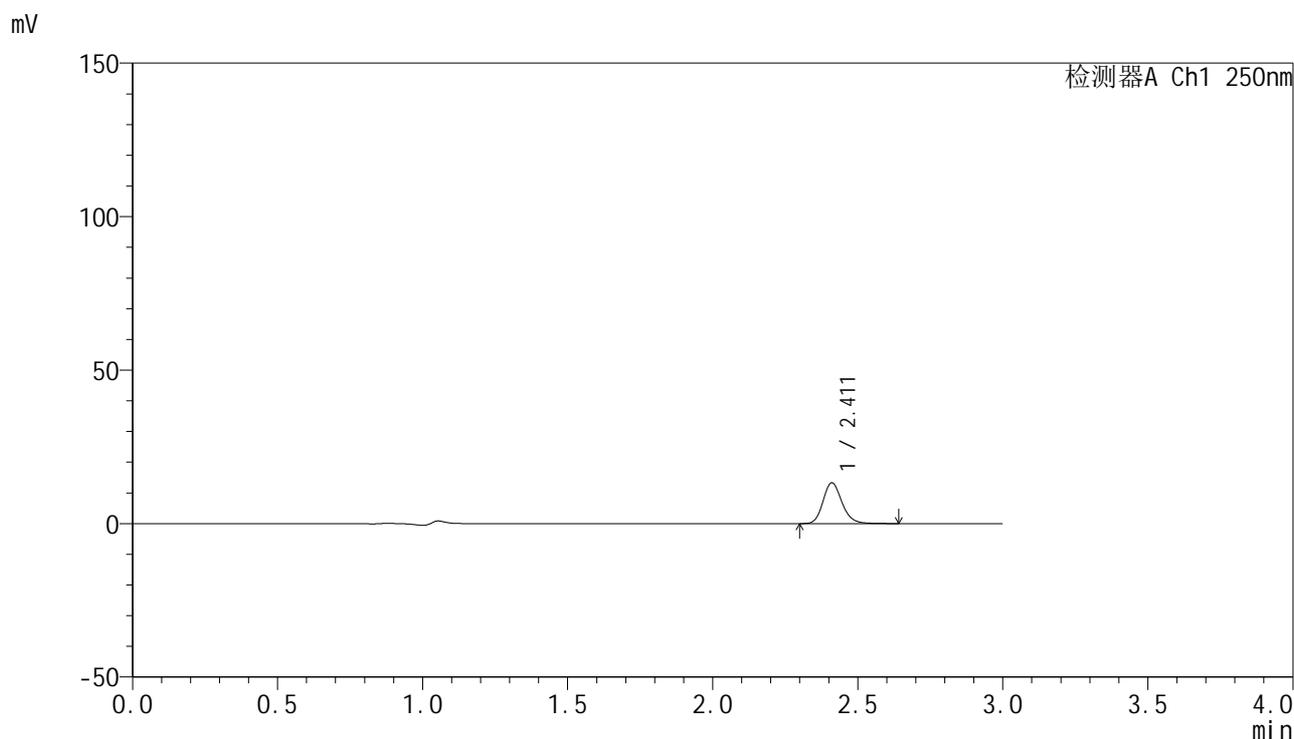

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.411	60139	100.000	13234	6749	1.179	--
总计		60139	100.000	13234			

图49 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1684-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 19:43:35 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:37:27 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

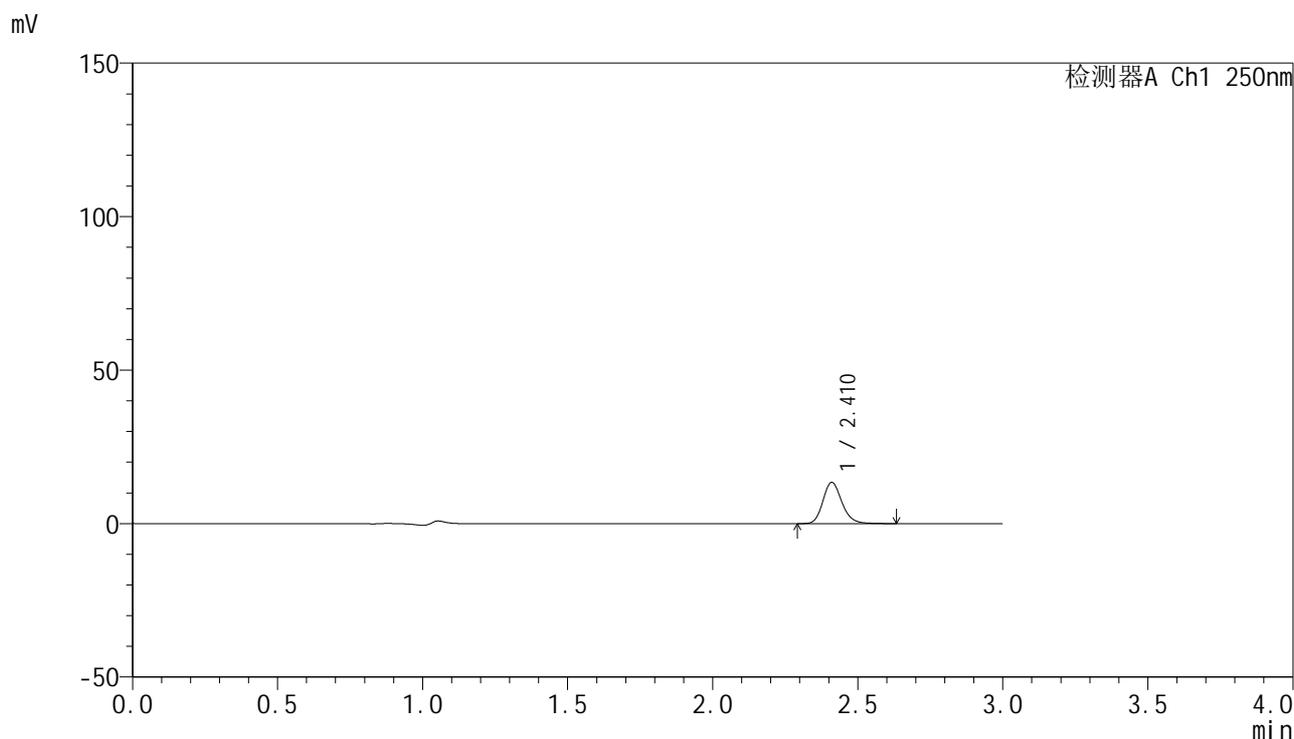

<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.410	61108	100.000	13398	6732	1.185	--
总计		61108	100.000	13398			

图50 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40°C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1685-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 19:46:58 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:37:30 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

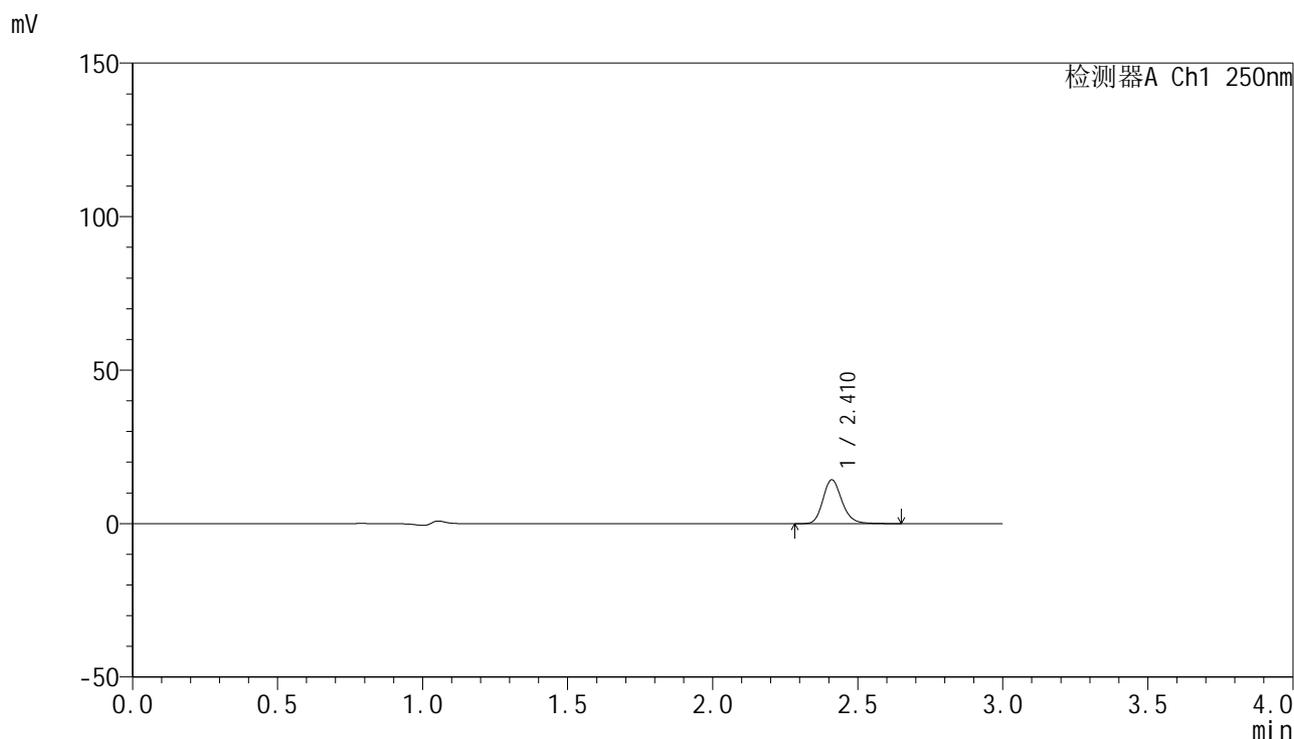

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.410	65087	100.000	14238	6734	1.188	--
总计		65087	100.000	14238			

图51 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1686-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 19:50:21 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:37:32 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

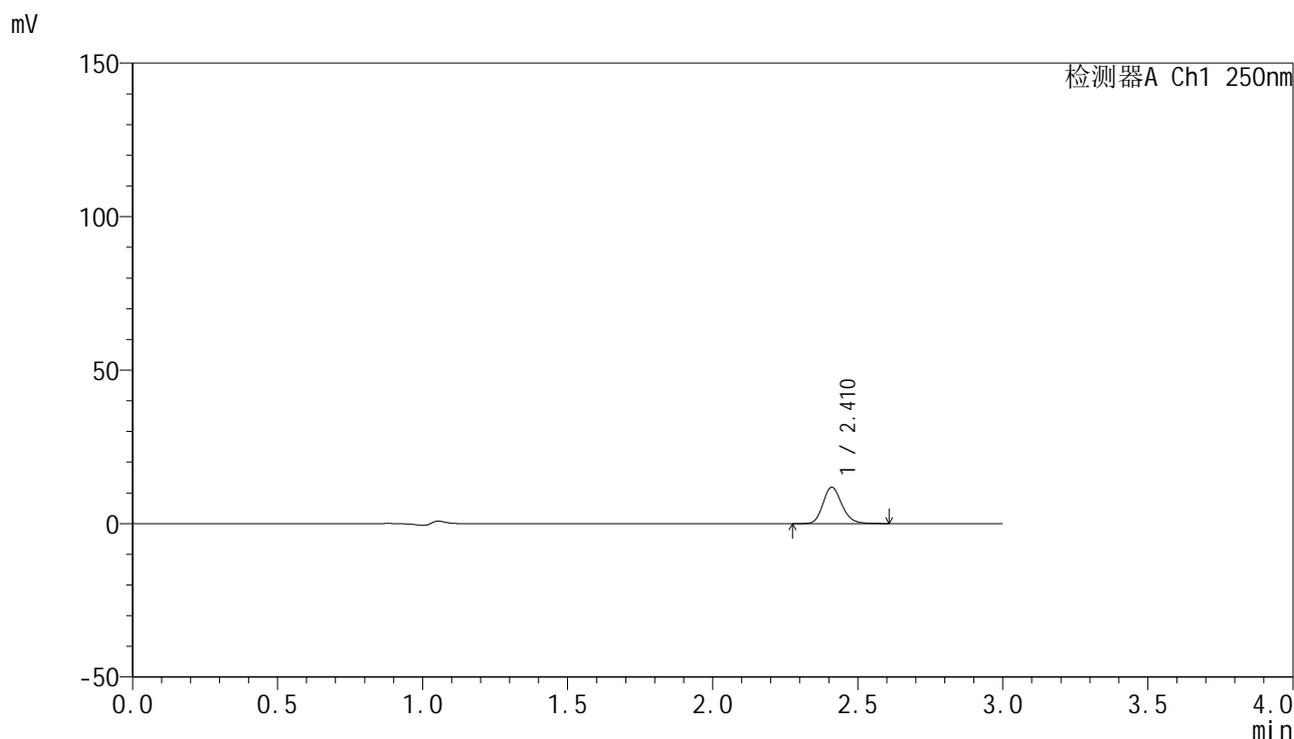

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.410	53682	100.000	11820	6754	1.185	--
总计		53682	100.000	11820			

图52 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1687-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 19:53:44 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:37:35 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

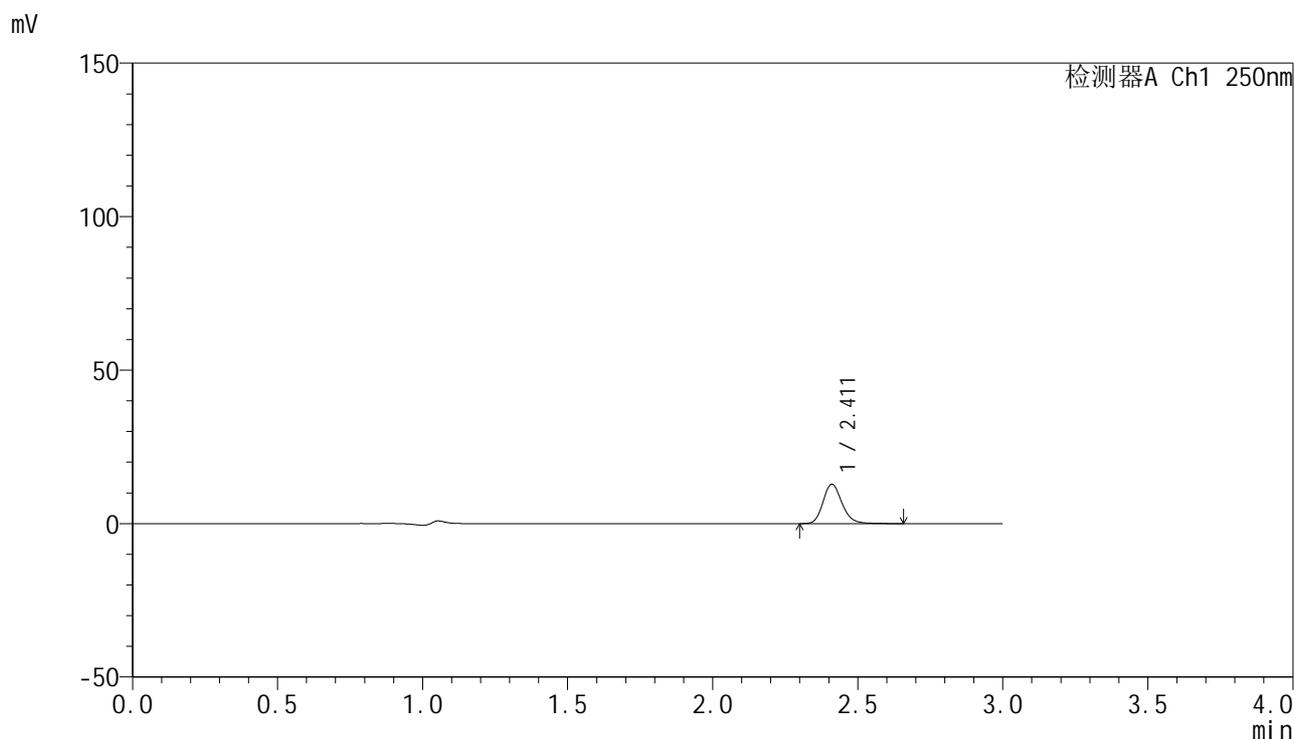

<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.411	58193	100.000	12783	6755	1.183	--
总计		58193	100.000	12783			

图53 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SMF-4099

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1688-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 19:57:06 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:37:38 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

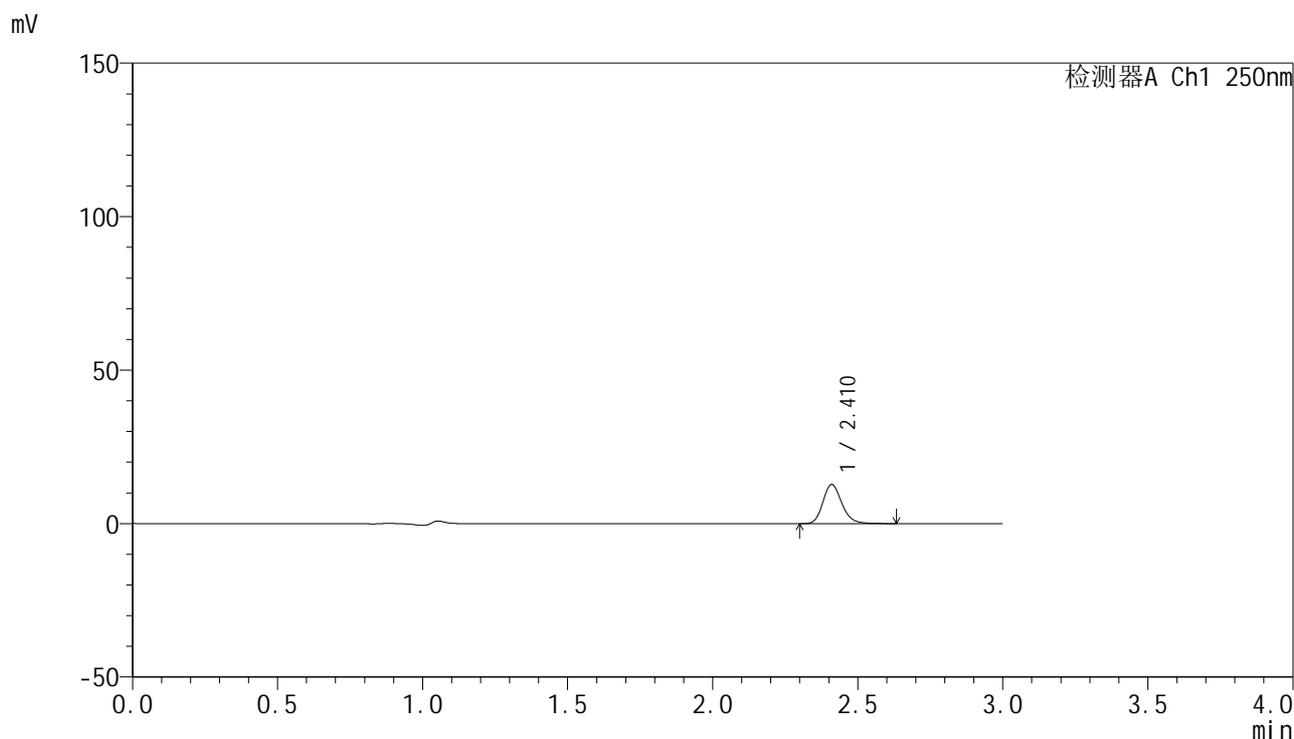

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.410	57942	100.000	12711	6746	1.189	--
总计		57942	100.000	12711			

图54 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1689-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 20:00:30 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:37:41 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

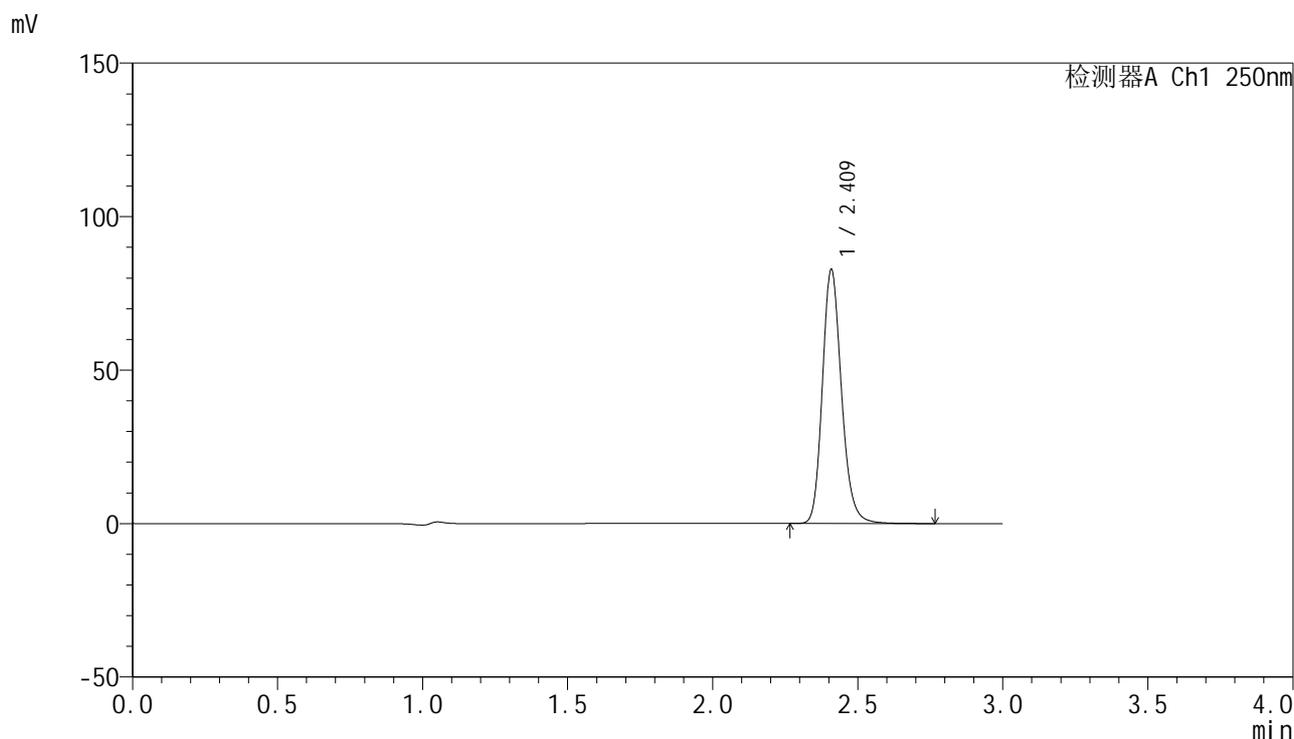

<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.409	378014	100.000	82133	6641	1.190	--
总计		378014	100.000	82133			

图55 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.8ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 0-68/26-1690-2 - cbzj-BXJUS91p-pH1.2jz-lf100z-20mg-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250722-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 20:03:51 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/07/24 09:37:43 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

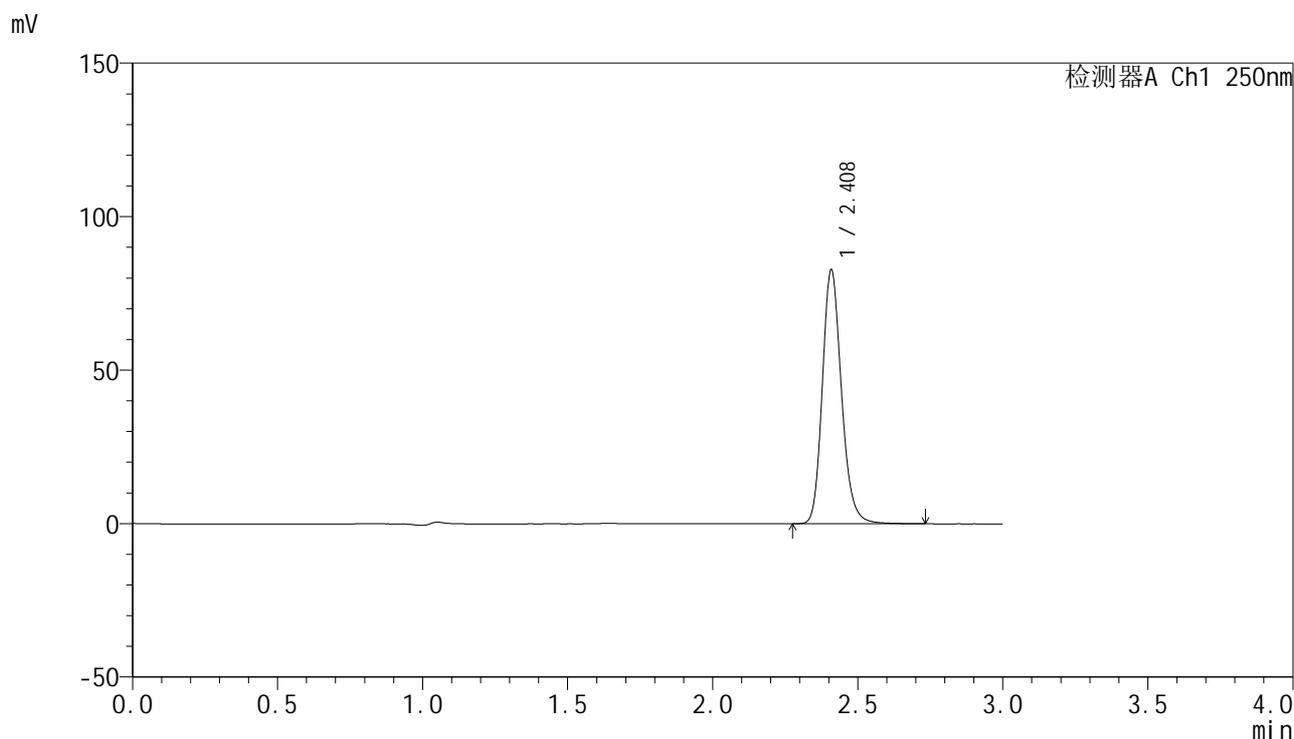

<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.408	377803	100.000	82150	6645	1.189	--
总计		377803	100.000	82150			

图56 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-BXJUS91批(20mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2