




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3678-2 - zzp-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-rj.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 11:42:49 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

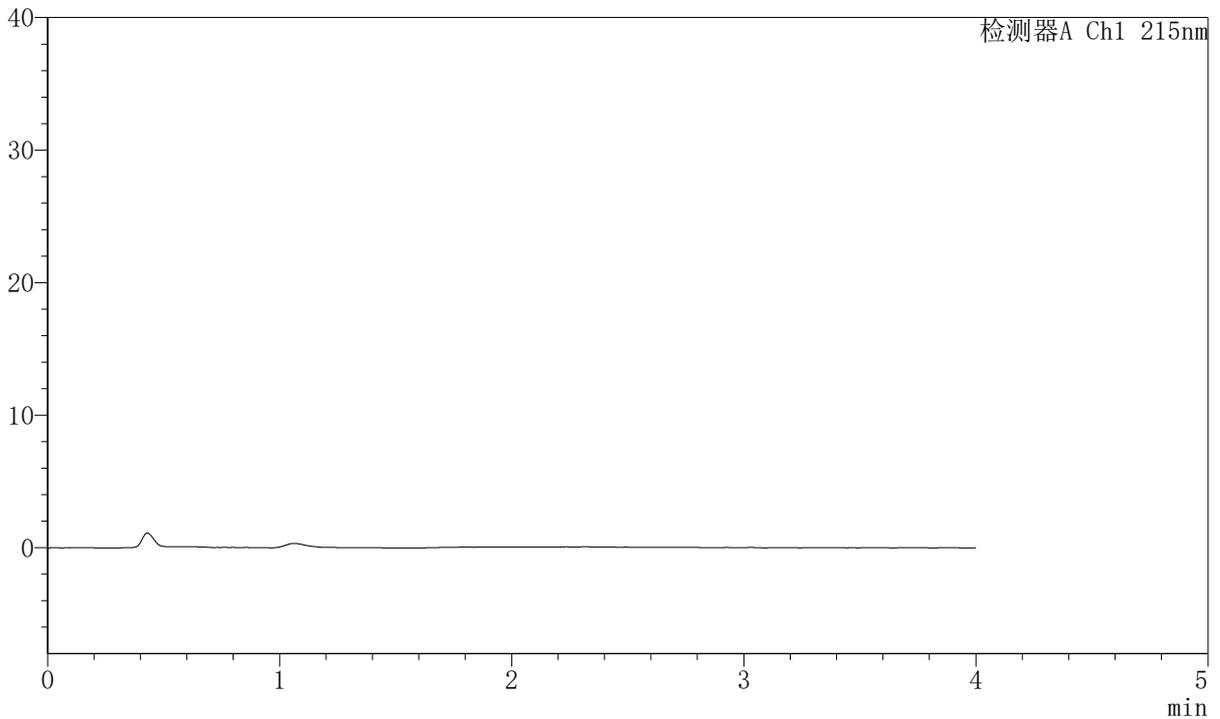

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(10mg/10mg规格)-pH2.0介质
 溶剂




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3679-2 - zzp-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 11:47:13 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:12 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

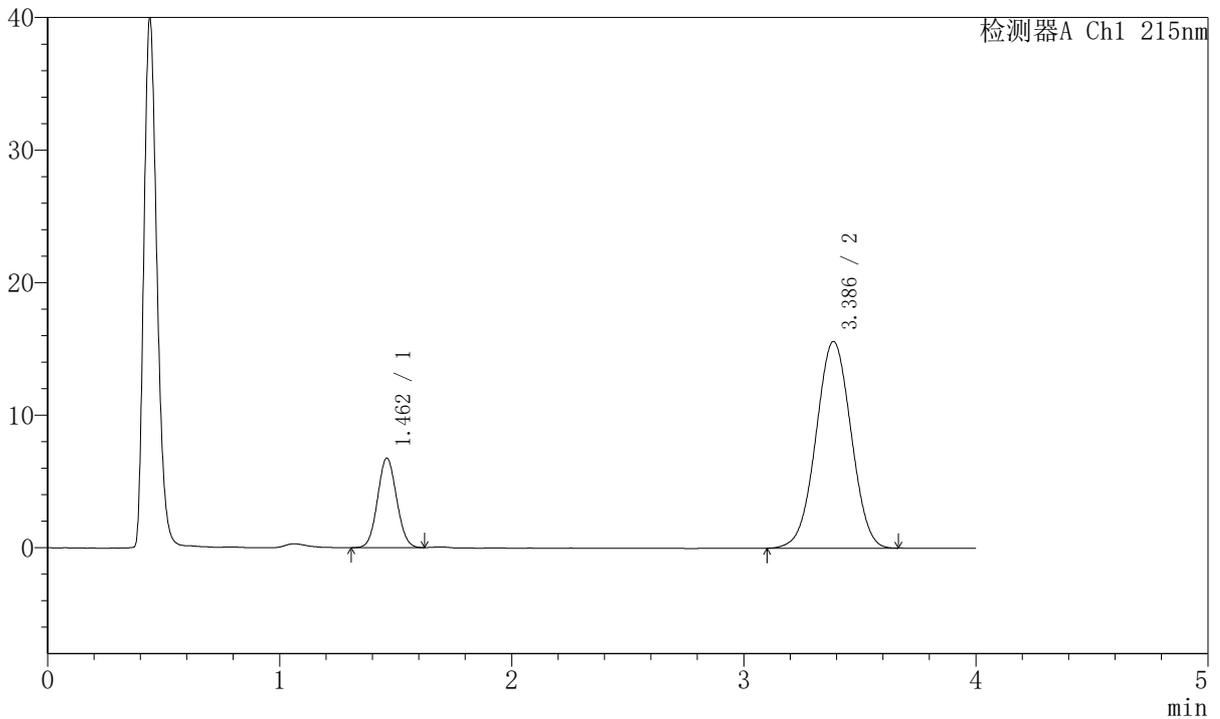

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.462	38667	19.094	6761	1489	1.064	--
2	3.386	163842	80.906	15592	2379	1.006	8.965
总计		202509	100.000	22353			

图2 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(10mg/10mg规格)-pH2.0介质
 对照品溶液-1-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3680-2 - zzp-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 11:51:37 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:14 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

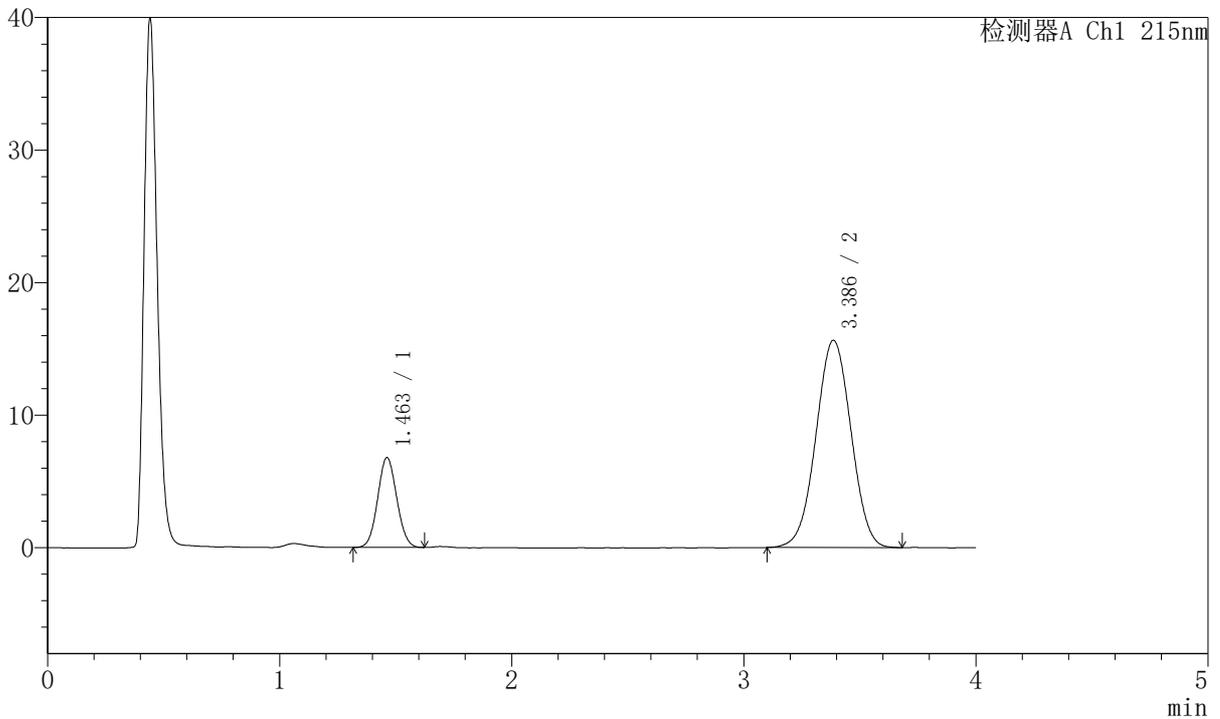

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数 (USP)	拖尾因子	分离度 (USP)
1	1.463	38790	19.122	6784	1490	1.066	--
2	3.386	164066	80.878	15631	2384	1.007	8.969
总计		202856	100.000	22414			

图3 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(10mg/10mg规格)-pH2.0介质
 对照品溶液-1-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3681-2 - zzp-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 11:56:01 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

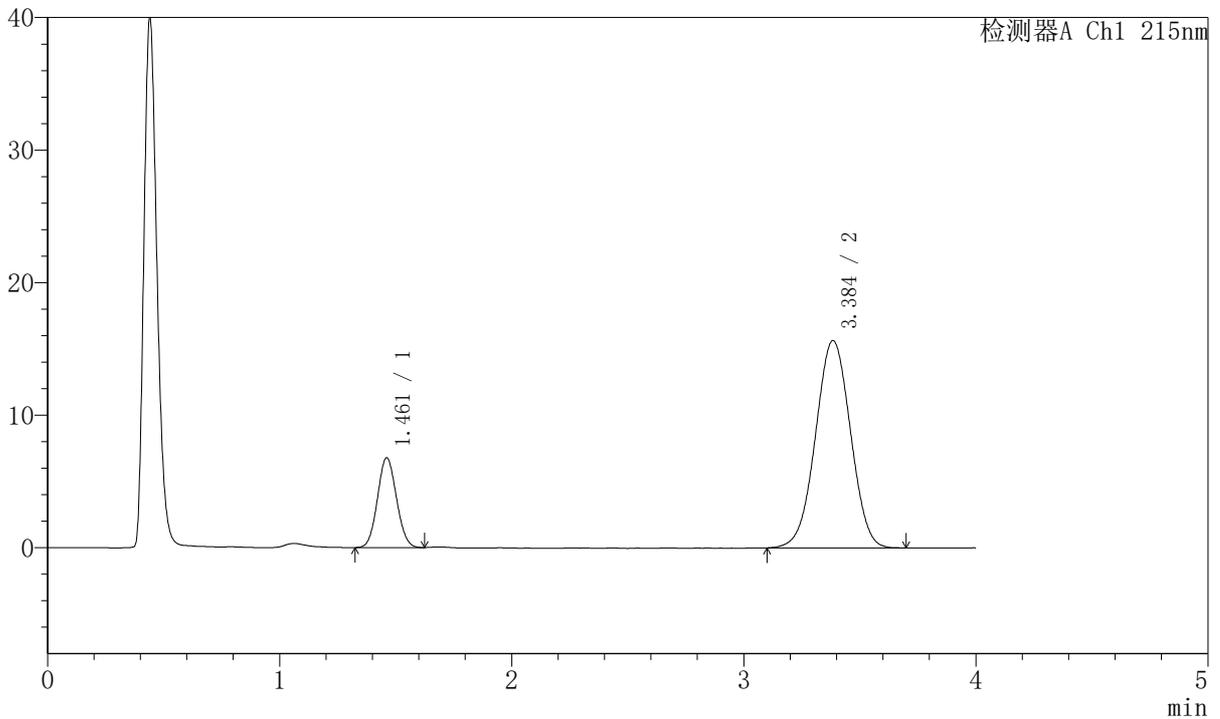

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数 (USP)	拖尾因子	分离度 (USP)
1	1.461	38620	19.048	6773	1495	1.074	--
2	3.384	164127	80.952	15624	2395	1.003	8.990
总计		202747	100.000	22398			

图4 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(10mg/10mg规格)-pH2.0介质
 对照品溶液-1-3




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3682-2 - zzp-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 12:00:25 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

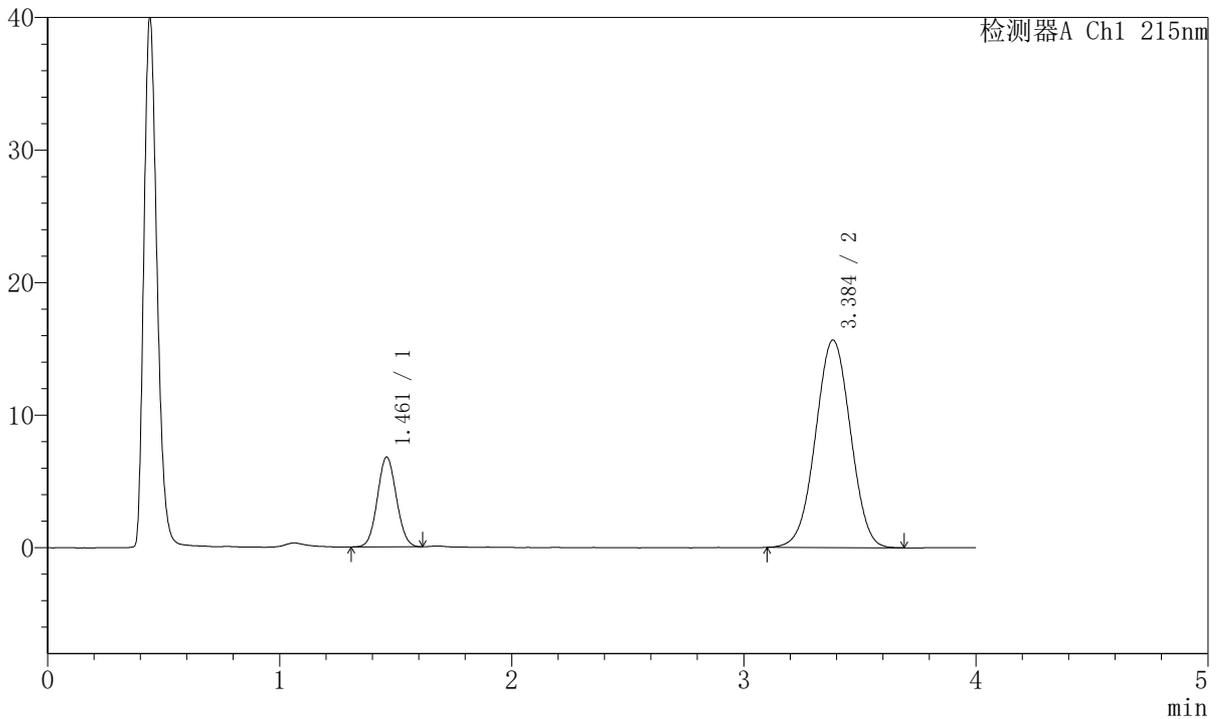

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数 (USP)	拖尾因子	分离度 (USP)
1	1.461	38588	19.060	6770	1504	1.065	--
2	3.384	163867	80.940	15633	2391	1.006	8.996
总计		202455	100.000	22402			


图5 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(10mg/10mg规格)-pH2.0介质
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3683-2 - zzp-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 12:04:49 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

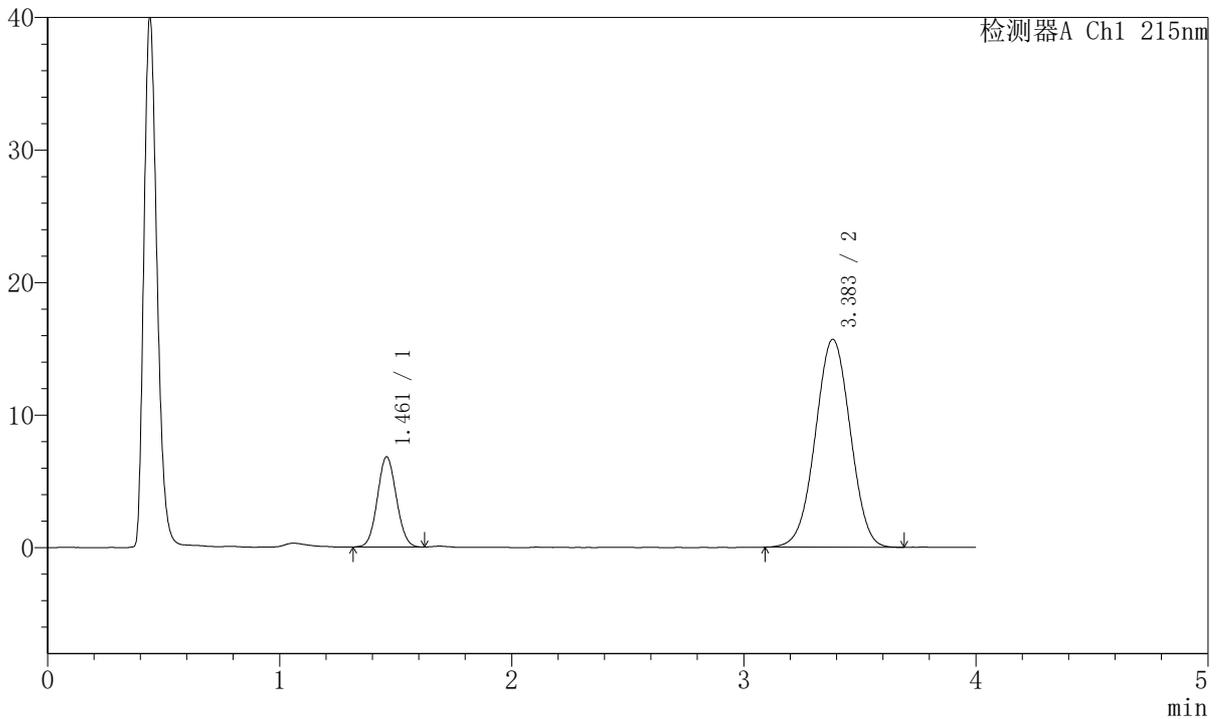

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数 (USP)	拖尾因子	分离度 (USP)
1	1.461	38707	19.087	6795	1505	1.066	--
2	3.383	164085	80.913	15673	2404	1.001	9.011
总计		202792	100.000	22468			

图6 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(10mg/10mg规格)-pH2.0介质
 对照品溶液-1-5




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3684-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 12:09:12 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

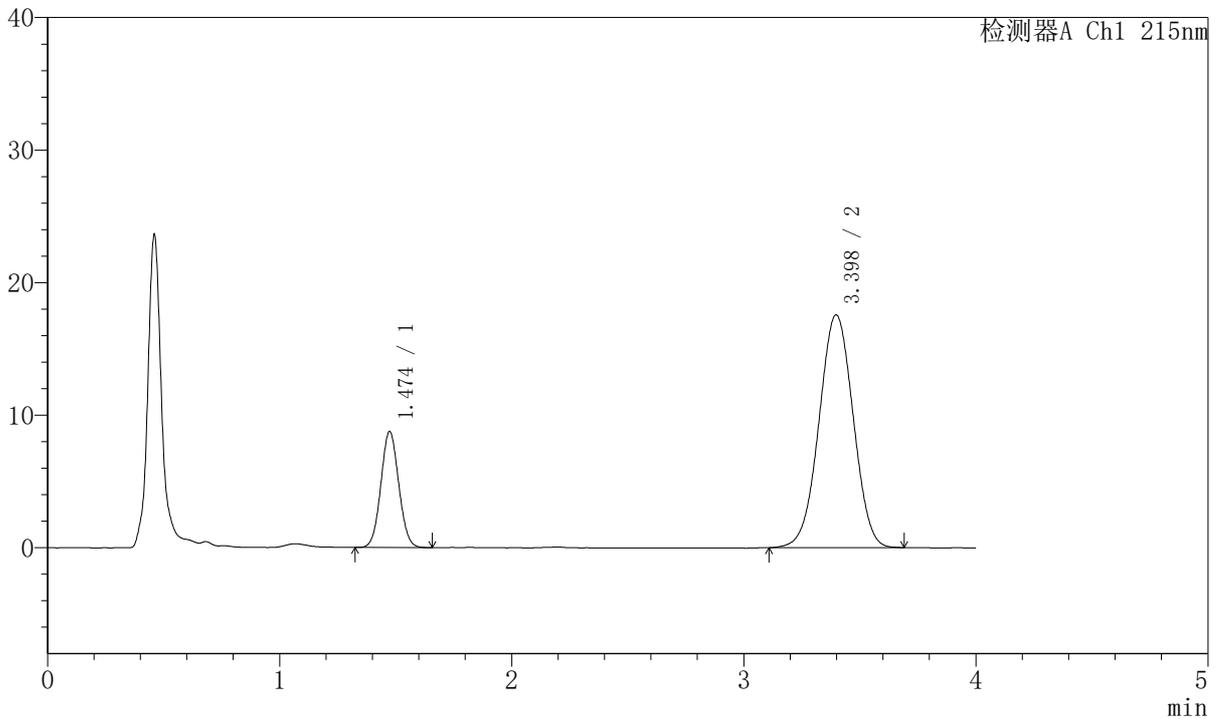

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.474	46896	20.669	8738	1733	1.059	--
2	3.398	179994	79.331	17567	2528	1.001	9.341
总计		226891	100.000	26305			

图7 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片1
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3685-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 12:13:35 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

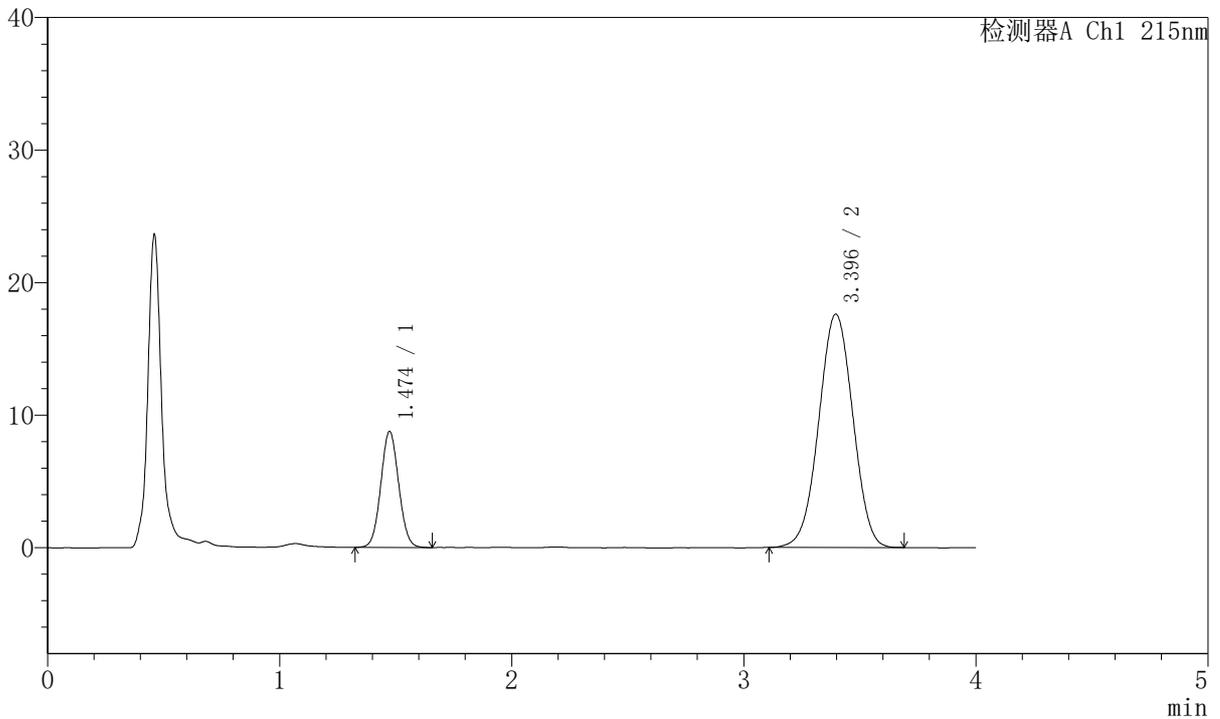

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.474	46939	20.707	8747	1740	1.058	--
2	3.396	179737	79.293	17609	2533	1.001	9.350
总计		226676	100.000	26356			

图8 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片1
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3686-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 12:17:58 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

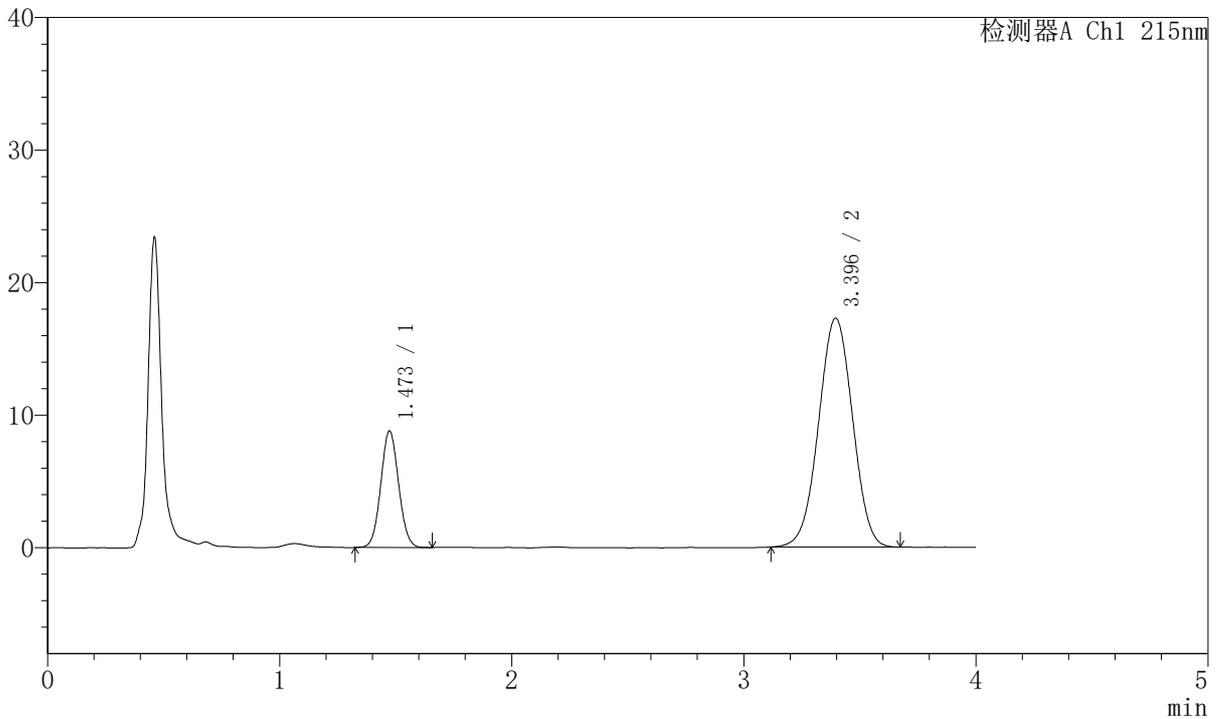

<峰表>

检测器A Ch1 215nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.473	46988	21.086	8791	1747	1.063	--
2	3.396	175851	78.914	17268	2550	1.000	9.377
总计		222840	100.000	26059			

图9 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3687-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 12:22:21 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:33 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

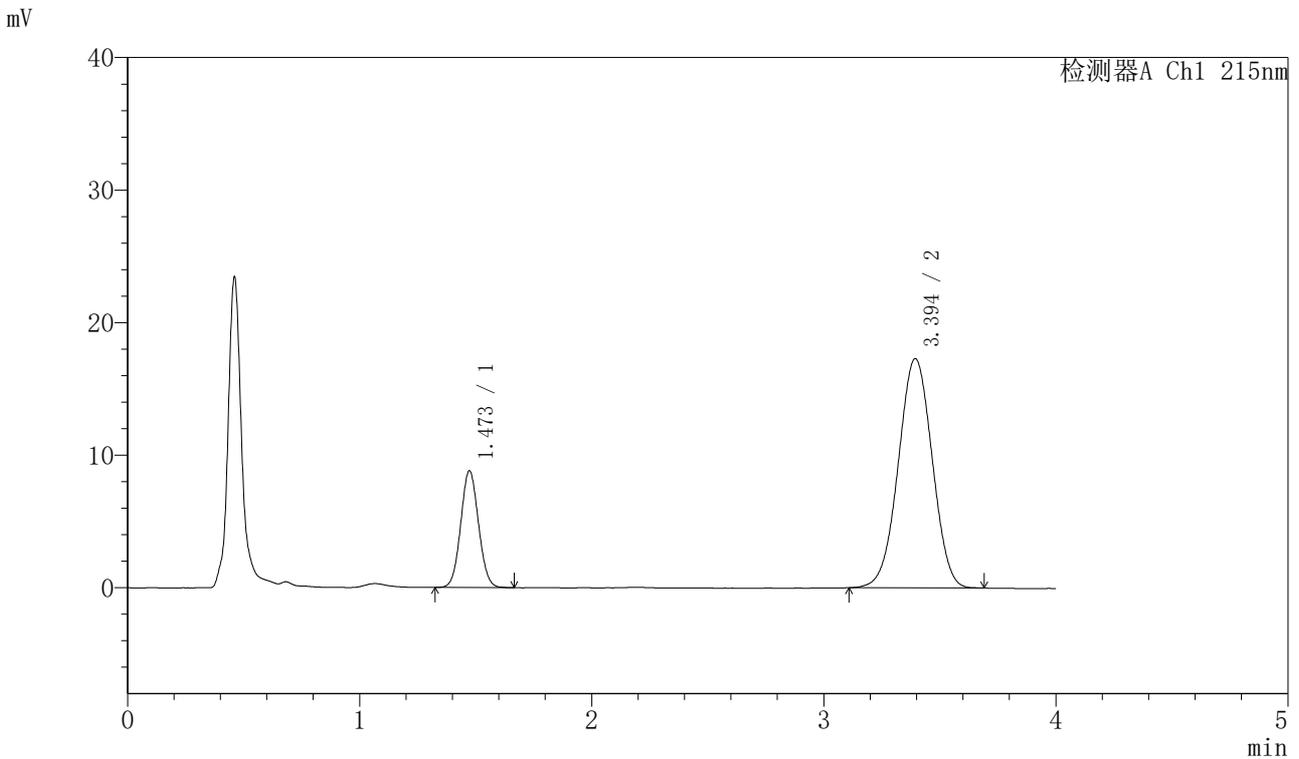

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.473	47093	21.137	8808	1748	1.060	--
2	3.394	175700	78.863	17285	2558	0.999	9.386
总计		222792	100.000	26093			

图10 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片2
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3688-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 12:26:44 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:35 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

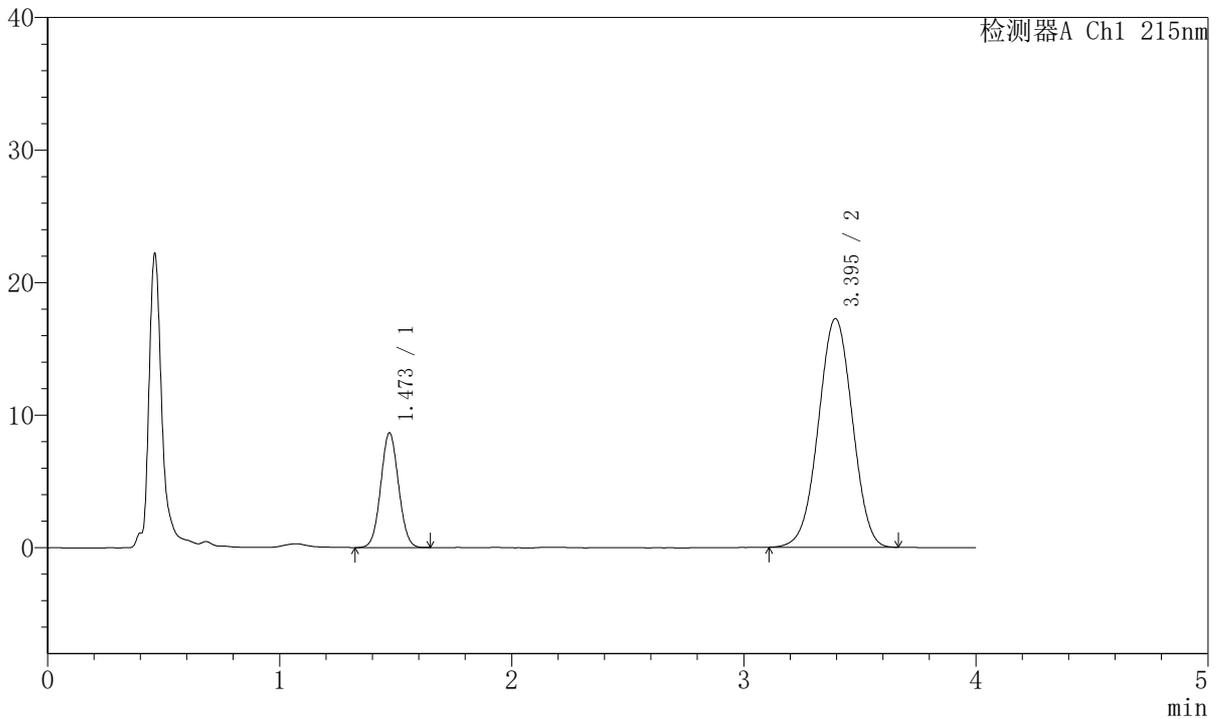

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.473	46132	20.804	8652	1750	1.053	--
2	3.395	175612	79.196	17256	2553	0.995	9.383
总计		221744	100.000	25908			

图11 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片3
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3689-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 12:31:07 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

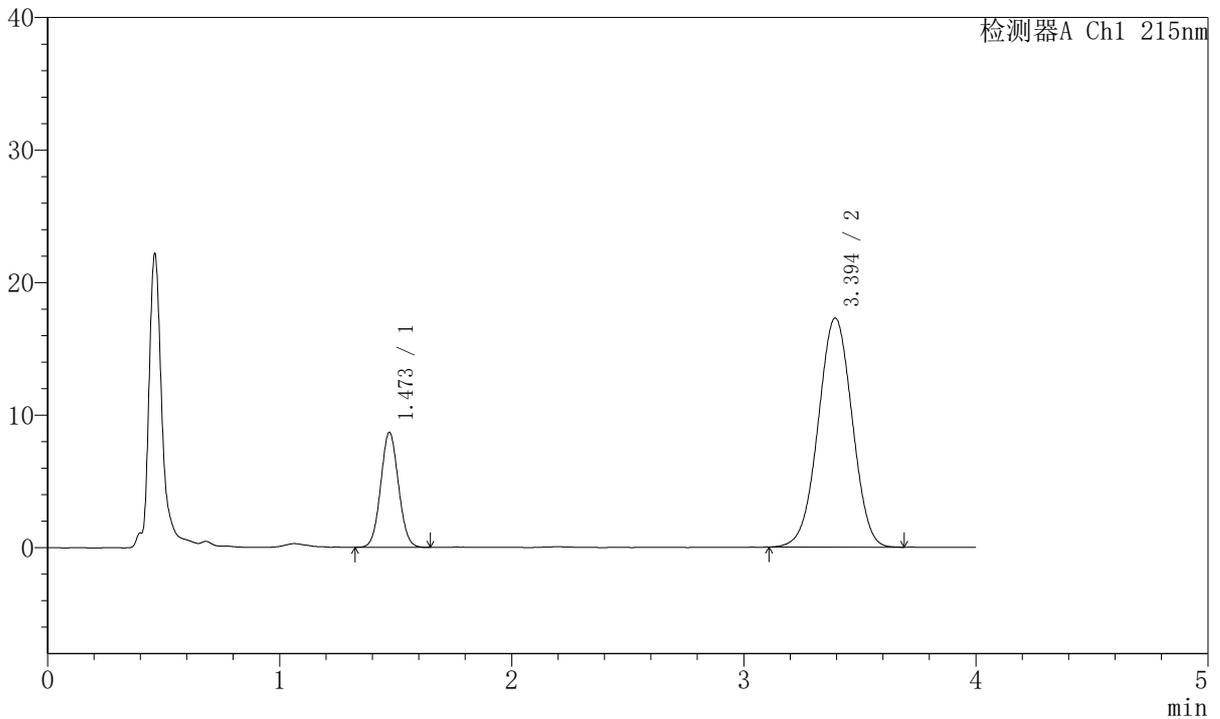

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.473	46087	20.766	8664	1751	1.057	--
2	3.394	175847	79.234	17276	2563	0.997	9.394
总计		221934	100.000	25940			

图12 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片3
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3690-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 12:35:29 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

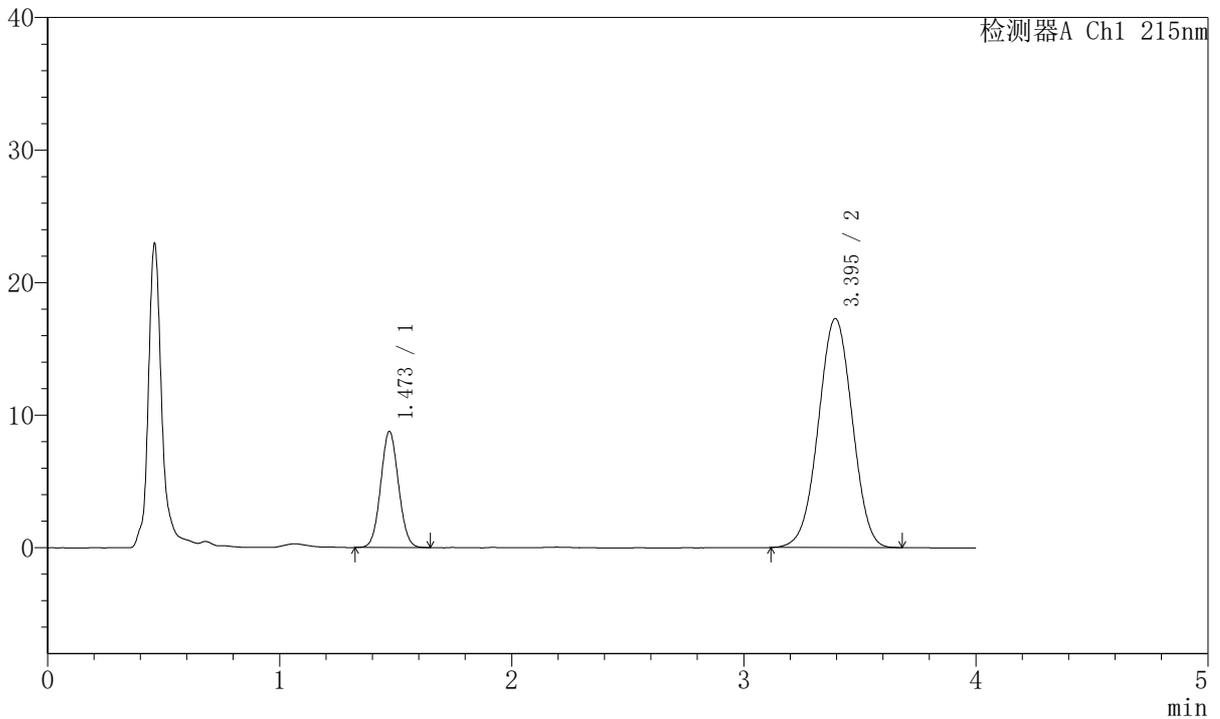

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.473	46671	21.017	8756	1742	1.057	--
2	3.395	175392	78.983	17270	2565	0.997	9.391
总计		222063	100.000	26026			

图13 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片4
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3691-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 12:39:52 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

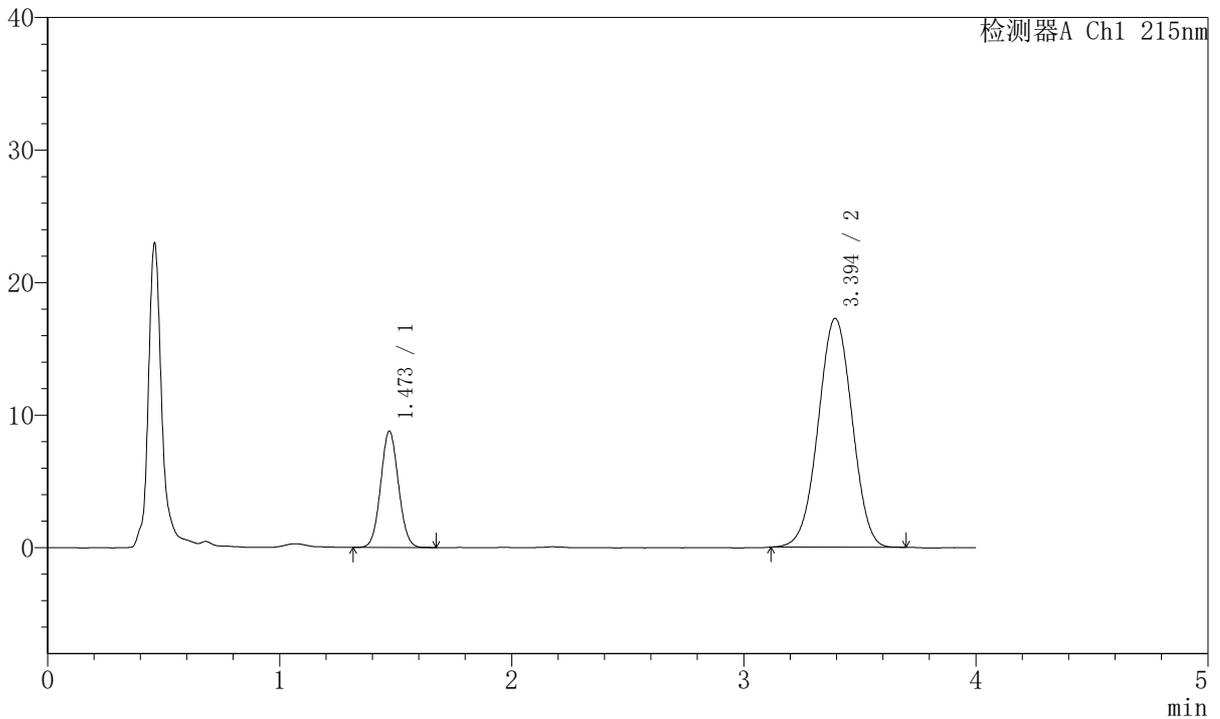

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.473	46838	21.077	8785	1748	1.059	--
2	3.394	175392	78.923	17259	2564	0.998	9.394
总计		222231	100.000	26044			

图14 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片4
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3692-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 12:44:15 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:46 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

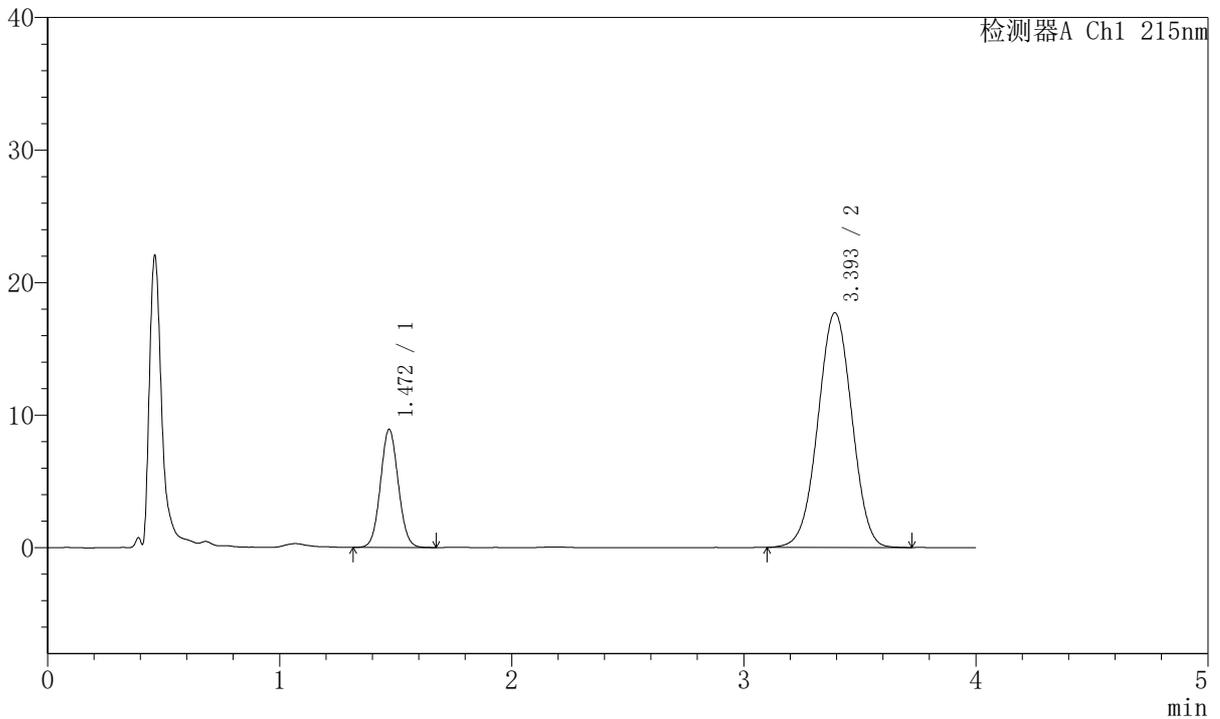

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	47583	20.920	8912	1750	1.061	--
2	3.393	179870	79.080	17678	2559	1.000	9.392
总计		227453	100.000	26589			

图15 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片5
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3693-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 12:48:38 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:49 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

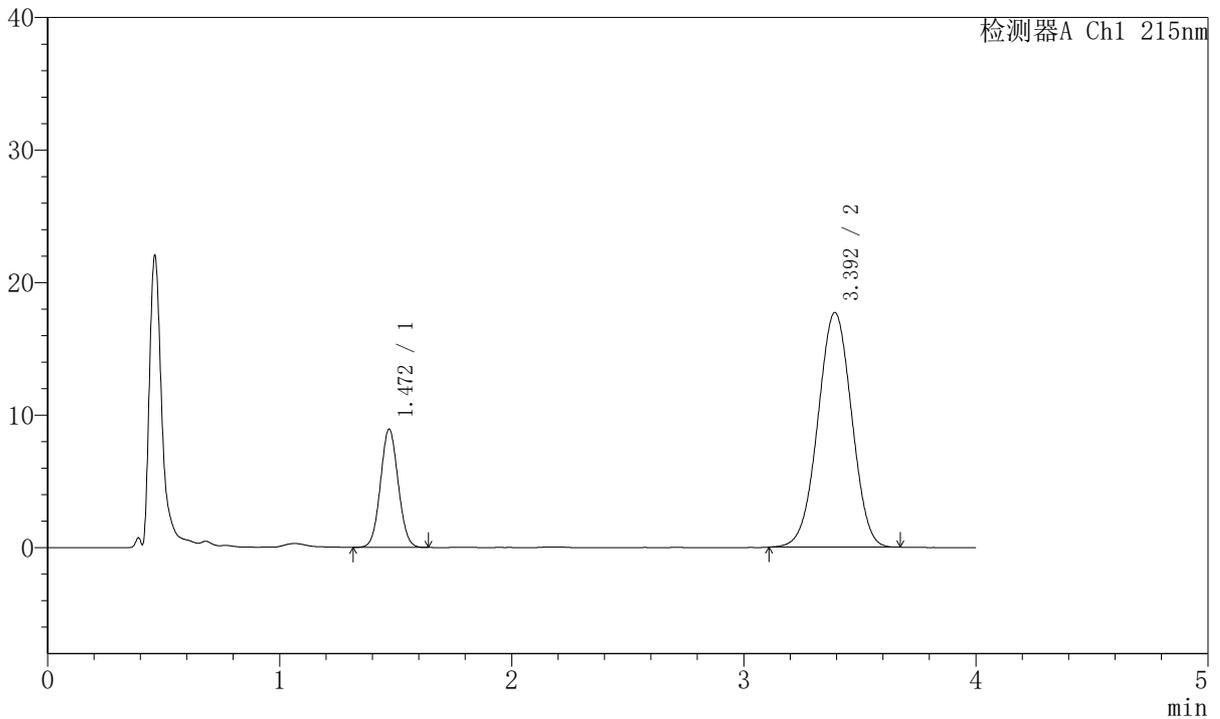

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	47457	20.944	8927	1757	1.054	--
2	3.392	179129	79.056	17669	2575	0.996	9.418
总计		226586	100.000	26596			

图16 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片5
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3694-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 12:53:01 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

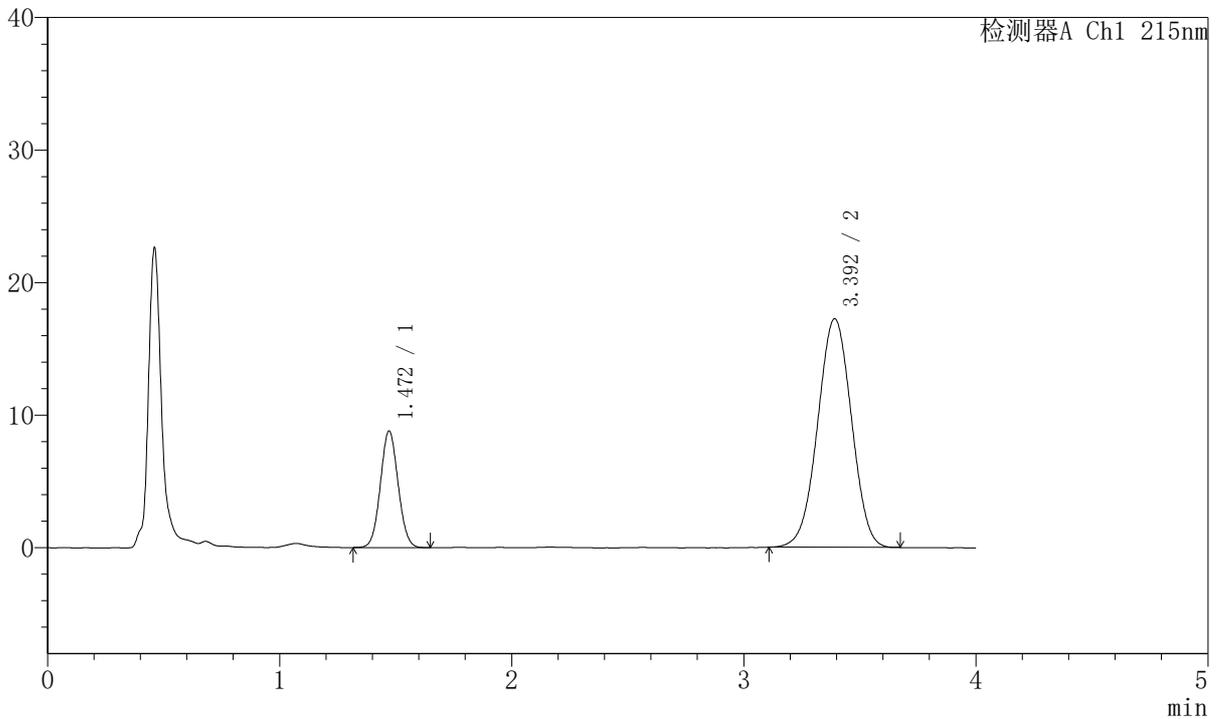

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	46823	21.143	8803	1754	1.059	--
2	3.392	174639	78.857	17228	2567	0.997	9.405
总计		221462	100.000	26032			

图17 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片6
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3695-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 12:57:23 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:54 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

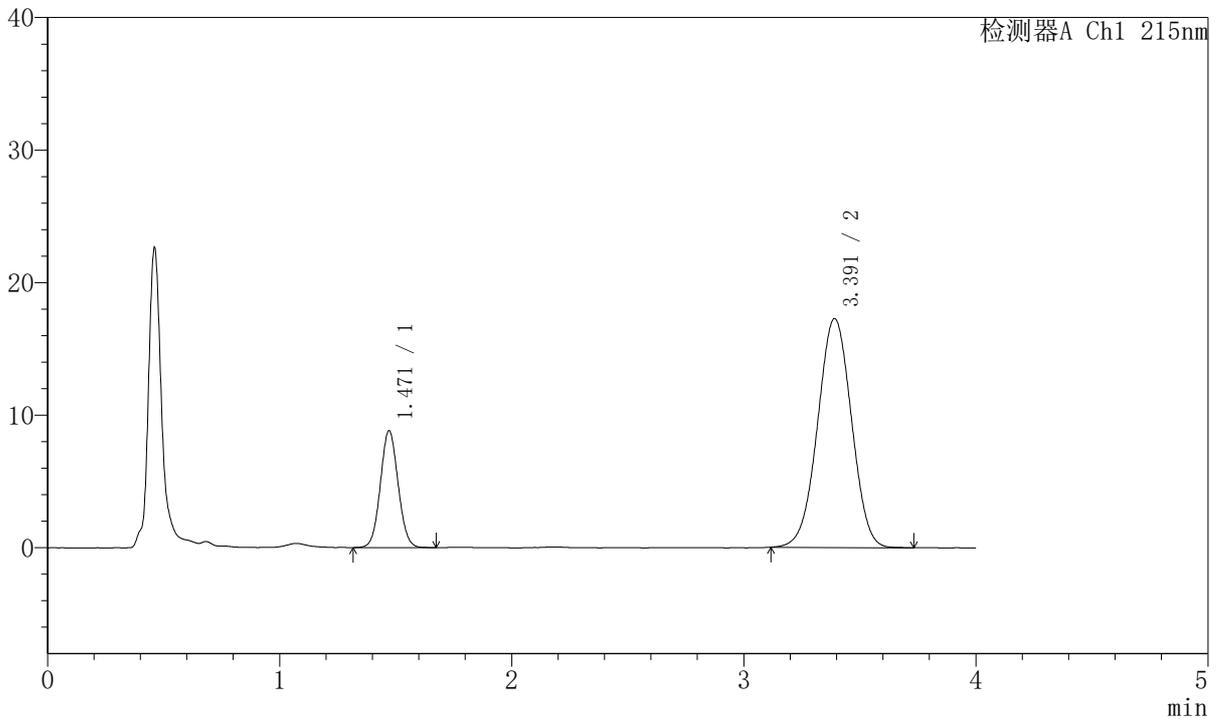

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	47070	21.185	8824	1756	1.062	--
2	3.391	175115	78.815	17258	2576	0.998	9.417
总计		222185	100.000	26082			

图18 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片6
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3696-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 13:01:46 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

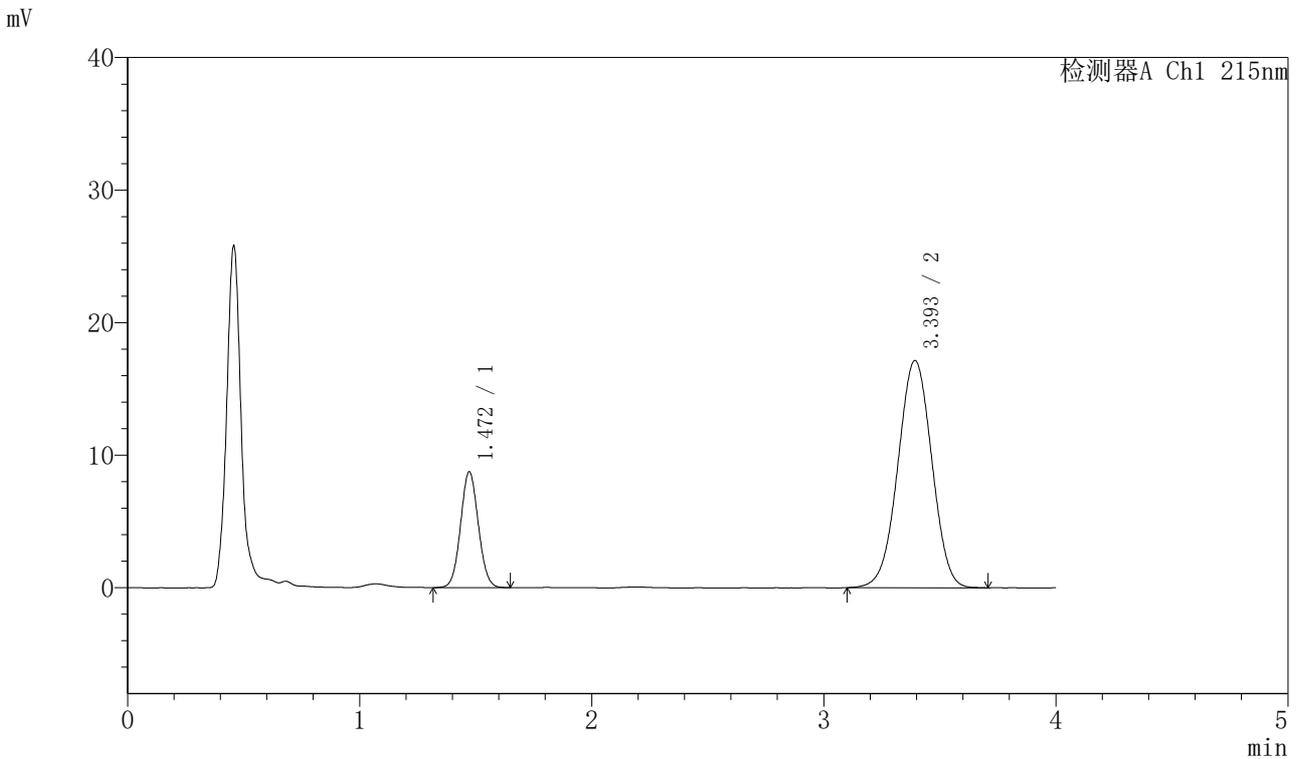

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	46540	21.086	8740	1758	1.060	--
2	3.393	174172	78.914	17116	2566	0.996	9.405
总计		220712	100.000	25856			

图19 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片1
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3697-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 13:06:10 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:34:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

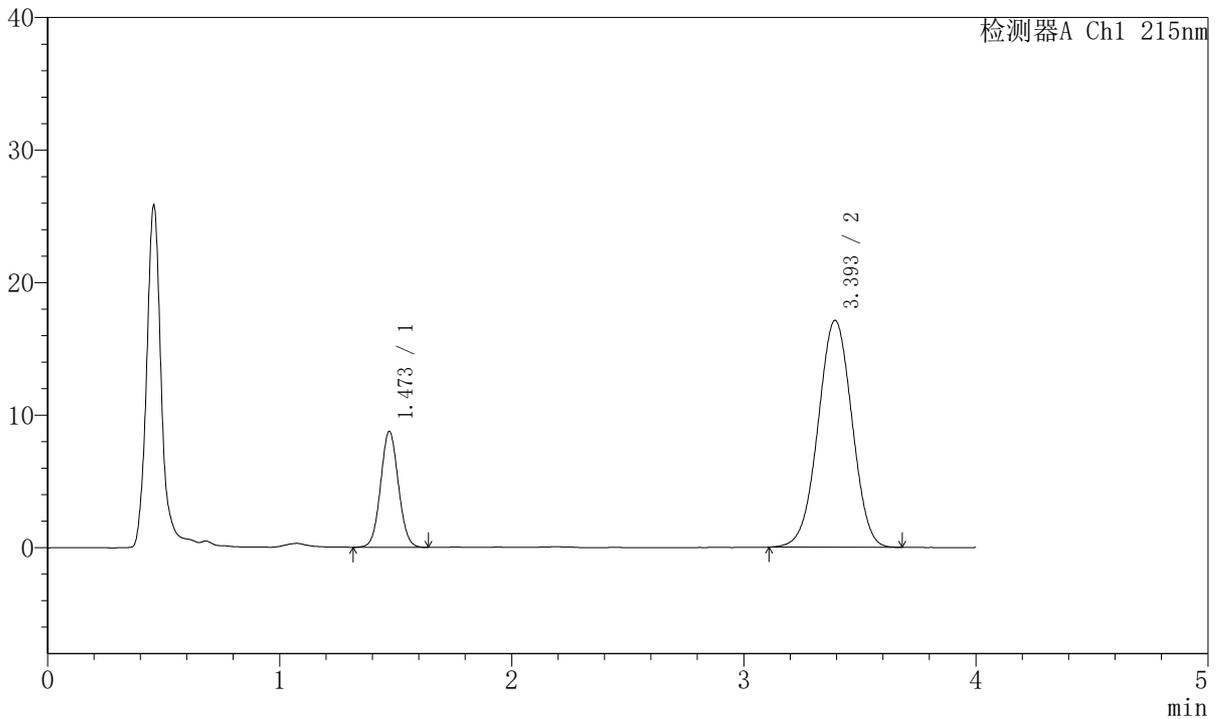

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.473	46643	21.161	8754	1756	1.058	--
2	3.393	173776	78.839	17100	2571	0.995	9.410
总计		220419	100.000	25853			

图20 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片1
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3698-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 13:10:32 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

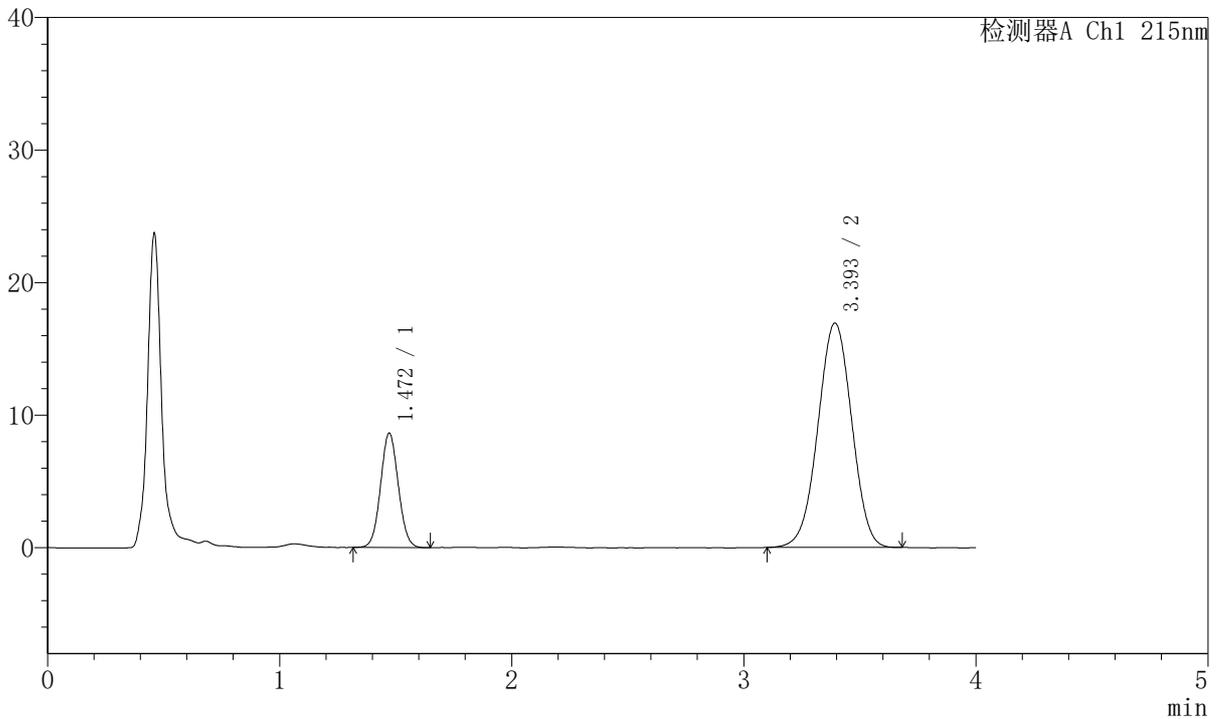

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	45801	21.086	8627	1767	1.059	--
2	3.393	171403	78.914	16902	2575	0.993	9.425
总计		217204	100.000	25529			

图21 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片2
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3699-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 13:14:56 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

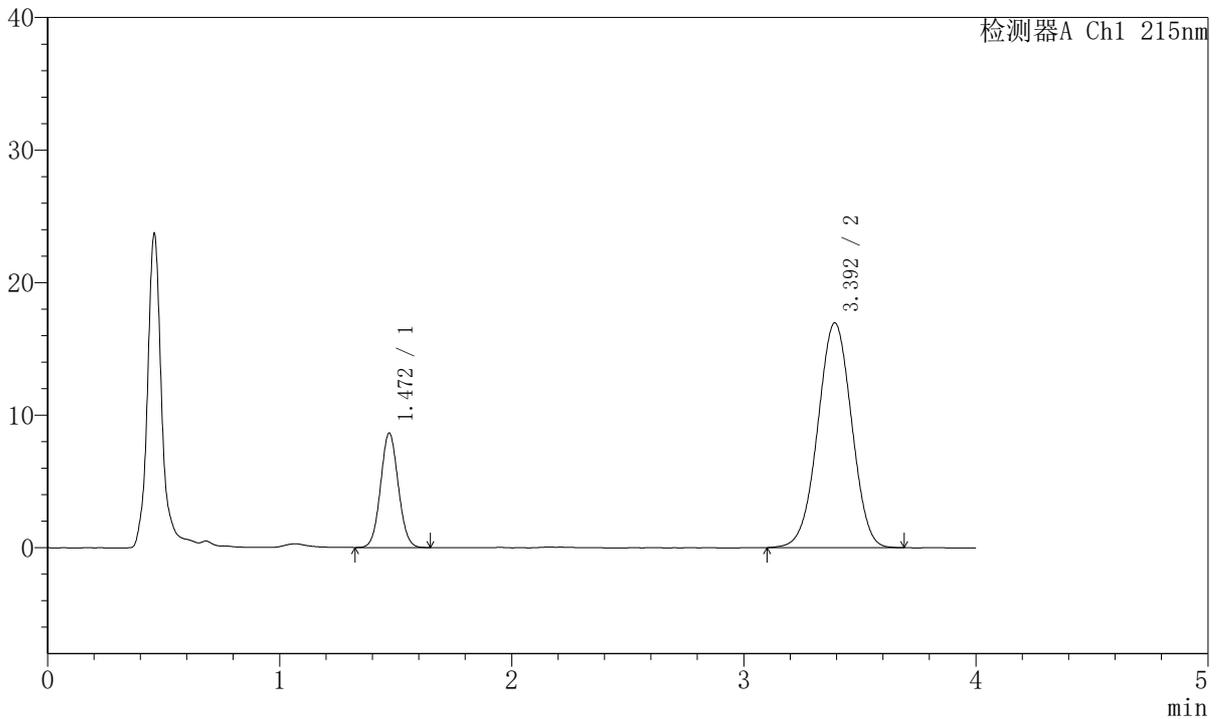

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	45943	21.108	8647	1767	1.062	--
2	3.392	171717	78.892	16937	2577	0.993	9.426
总计		217659	100.000	25584			

图22 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片2
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3700-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 13:19:18 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

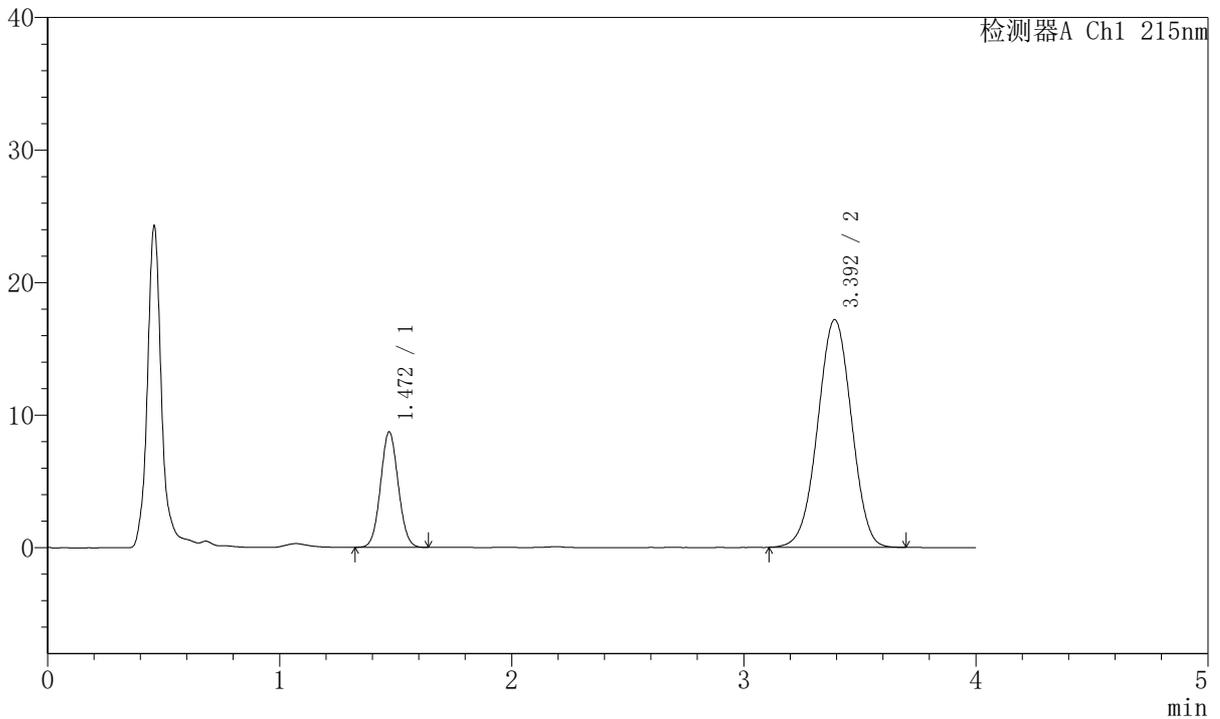

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	46215	20.999	8716	1768	1.057	--
2	3.392	173863	79.001	17163	2585	0.991	9.436
总计		220079	100.000	25879			

图23 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片3
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3701-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 13:23:39 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:09 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

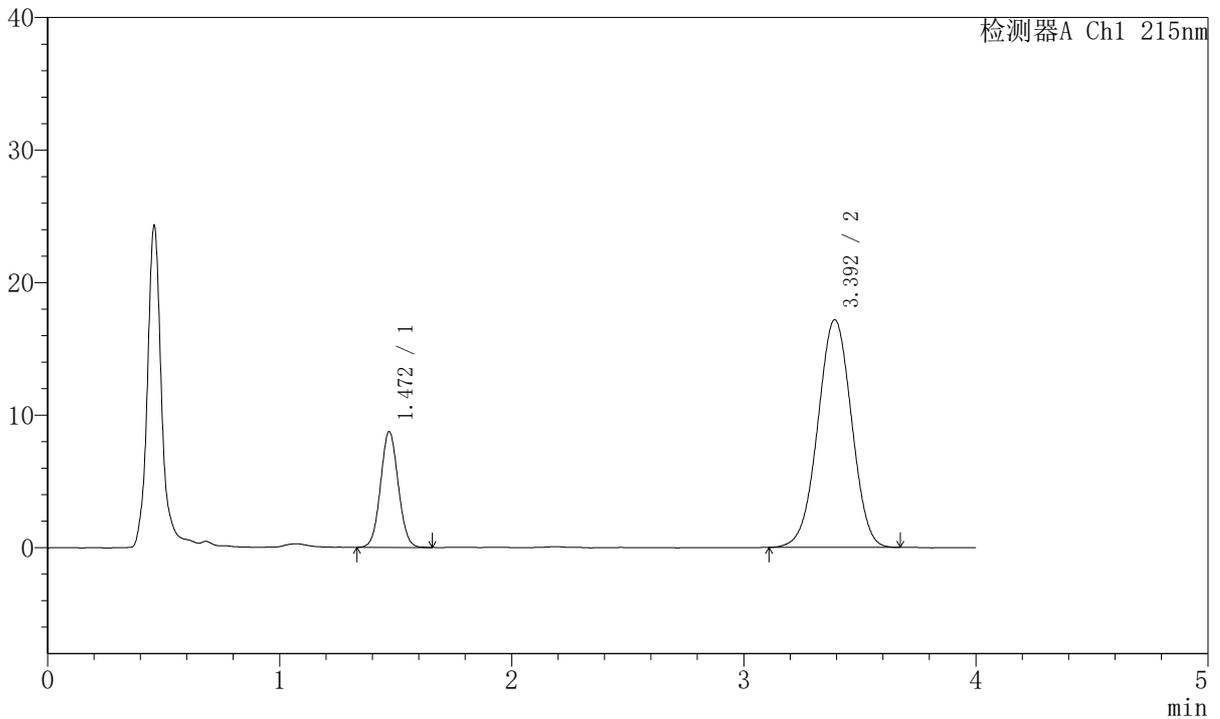

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	46321	21.071	8735	1767	1.057	--
2	3.392	173515	78.929	17147	2589	0.994	9.441
总计		219836	100.000	25883			

图24 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片3
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3702-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 13:28:02 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:12 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

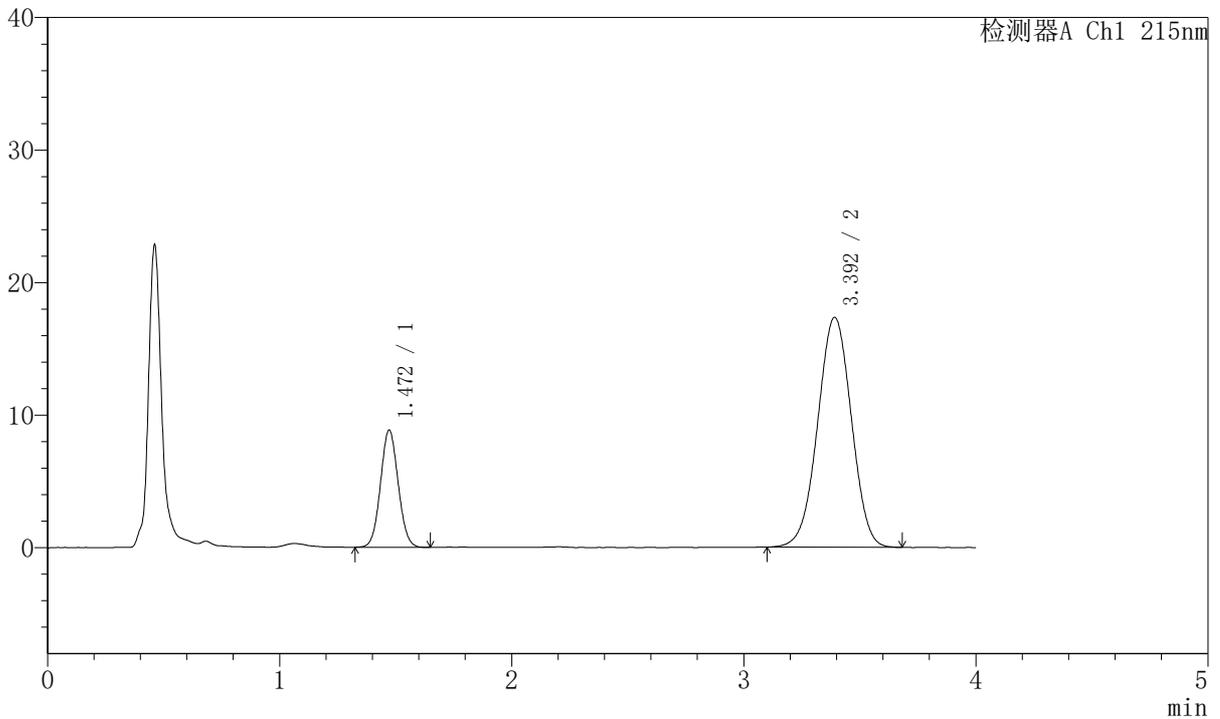

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	46787	21.092	8837	1769	1.059	--
2	3.392	175039	78.908	17327	2603	0.993	9.459
总计		221826	100.000	26164			

图25 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片4
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3703-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 13:32:25 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

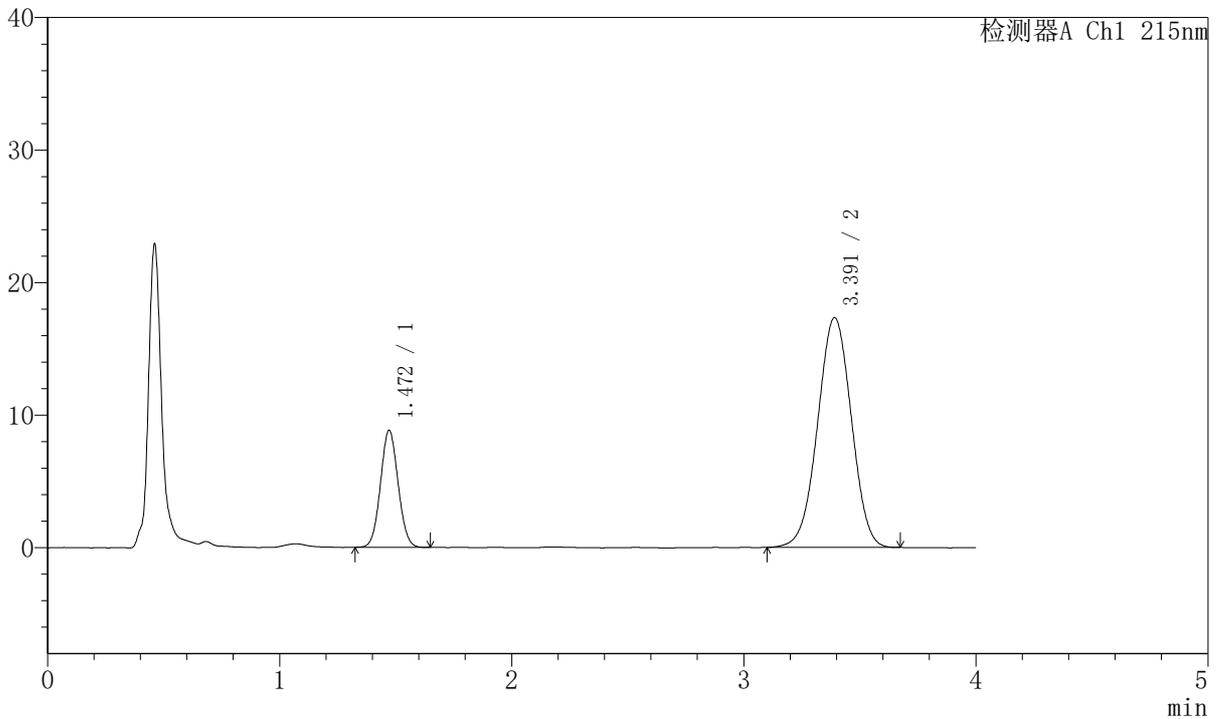

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	46602	21.014	8829	1778	1.056	--
2	3.391	175163	78.986	17318	2587	0.995	9.449
总计		221765	100.000	26147			

图26 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片4
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3704-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 13:36:48 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

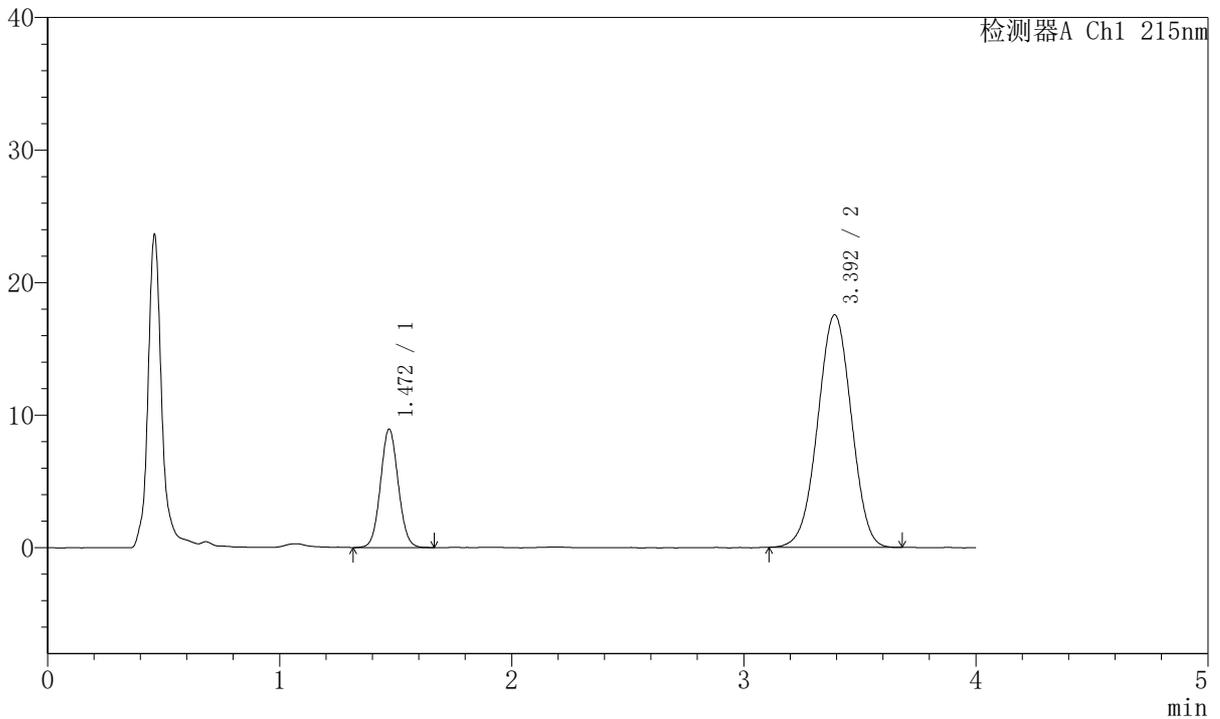

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	47539	21.199	8947	1772	1.061	--
2	3.392	176712	78.801	17520	2597	0.992	9.454
总计		224252	100.000	26467			

图27 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片5
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3705-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 13:41:10 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

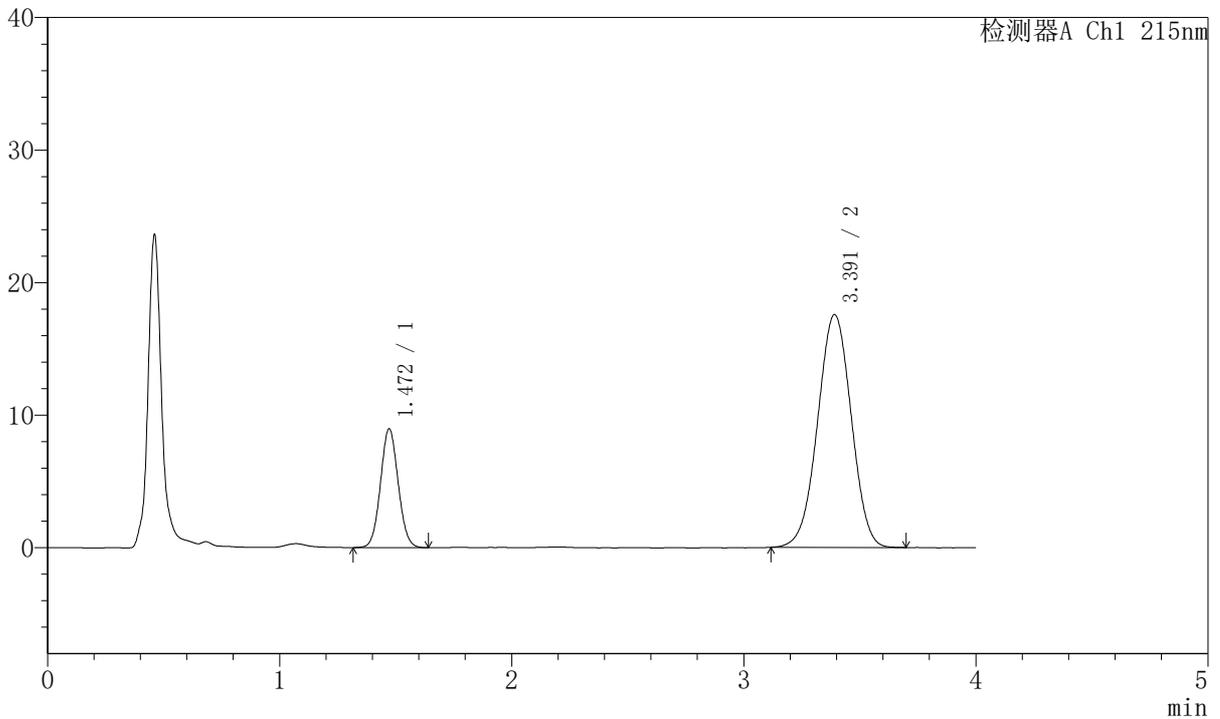

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	47685	21.228	8974	1769	1.061	--
2	3.391	176942	78.772	17553	2596	0.994	9.450
总计		224627	100.000	26528			

图28 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片5
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3706-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 13:45:33 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

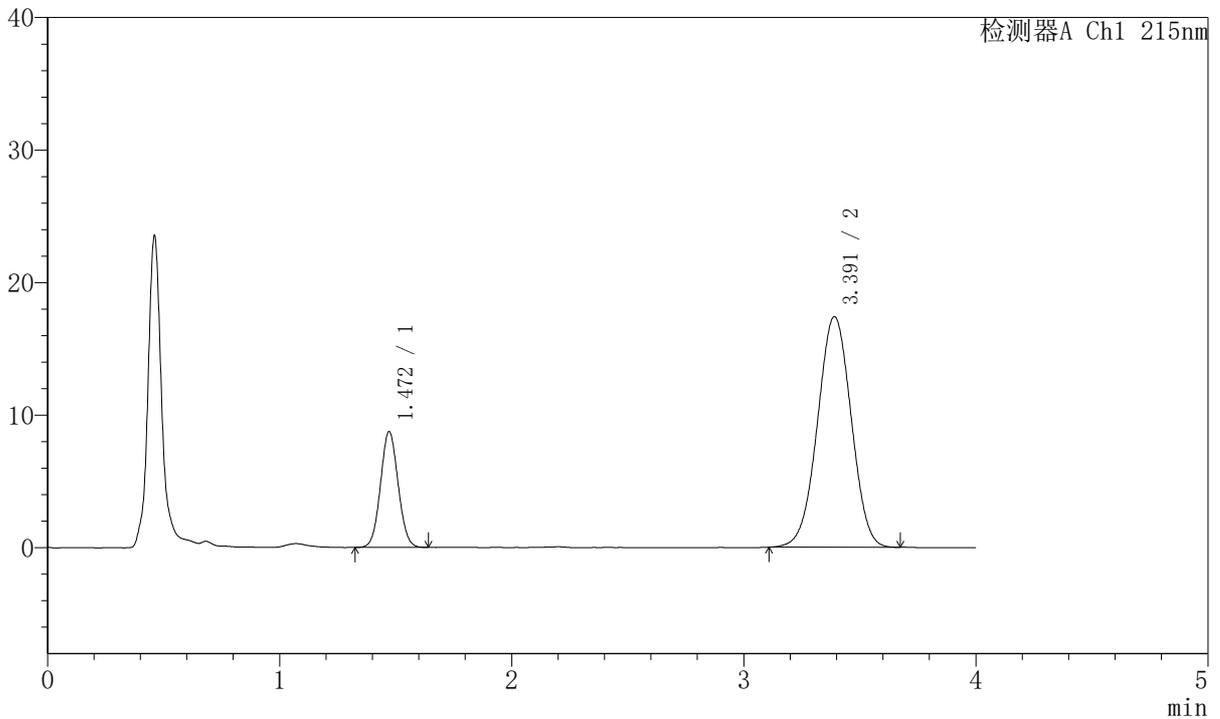

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	46252	20.858	8738	1768	1.060	--
2	3.391	175491	79.142	17389	2594	0.995	9.446
总计		221743	100.000	26127			

图29 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片6
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3707-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 13:49:55 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

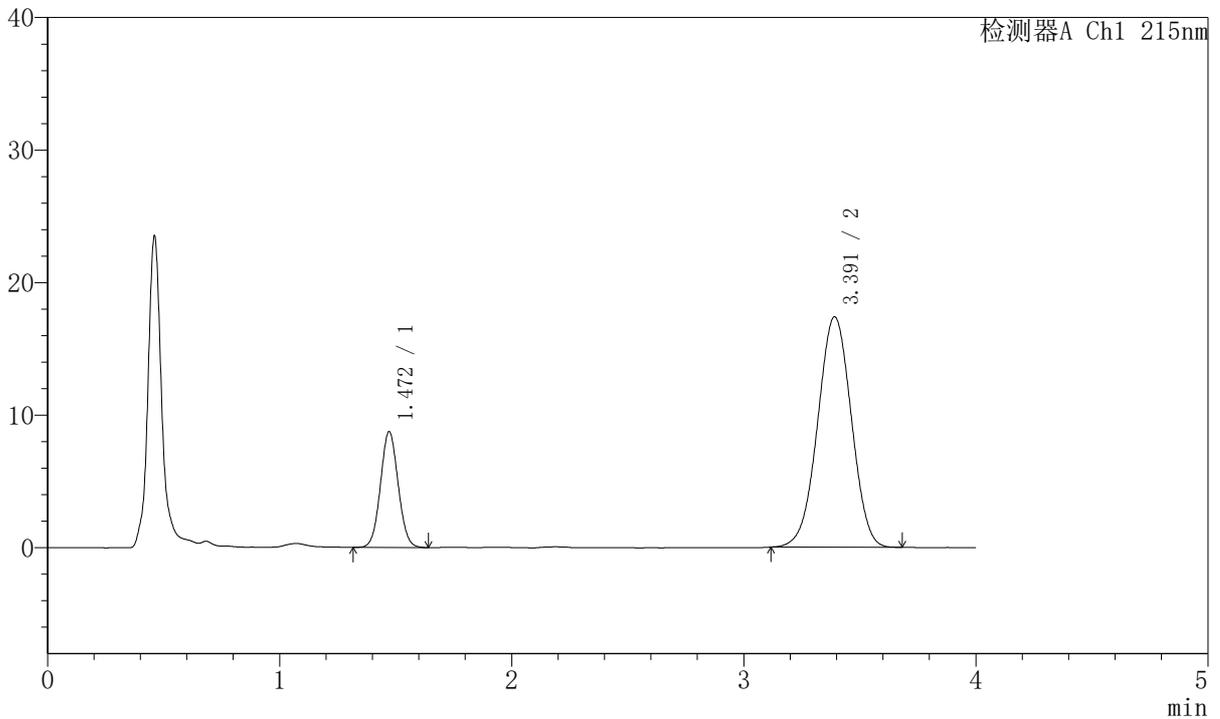

<峰表>

检测器A Ch1 215nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	46562	20.981	8750	1763	1.054	--
2	3.391	175360	79.019	17373	2593	0.993	9.440
总计		221922	100.000	26123			

图30 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片6
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3708-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 13:54:18 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

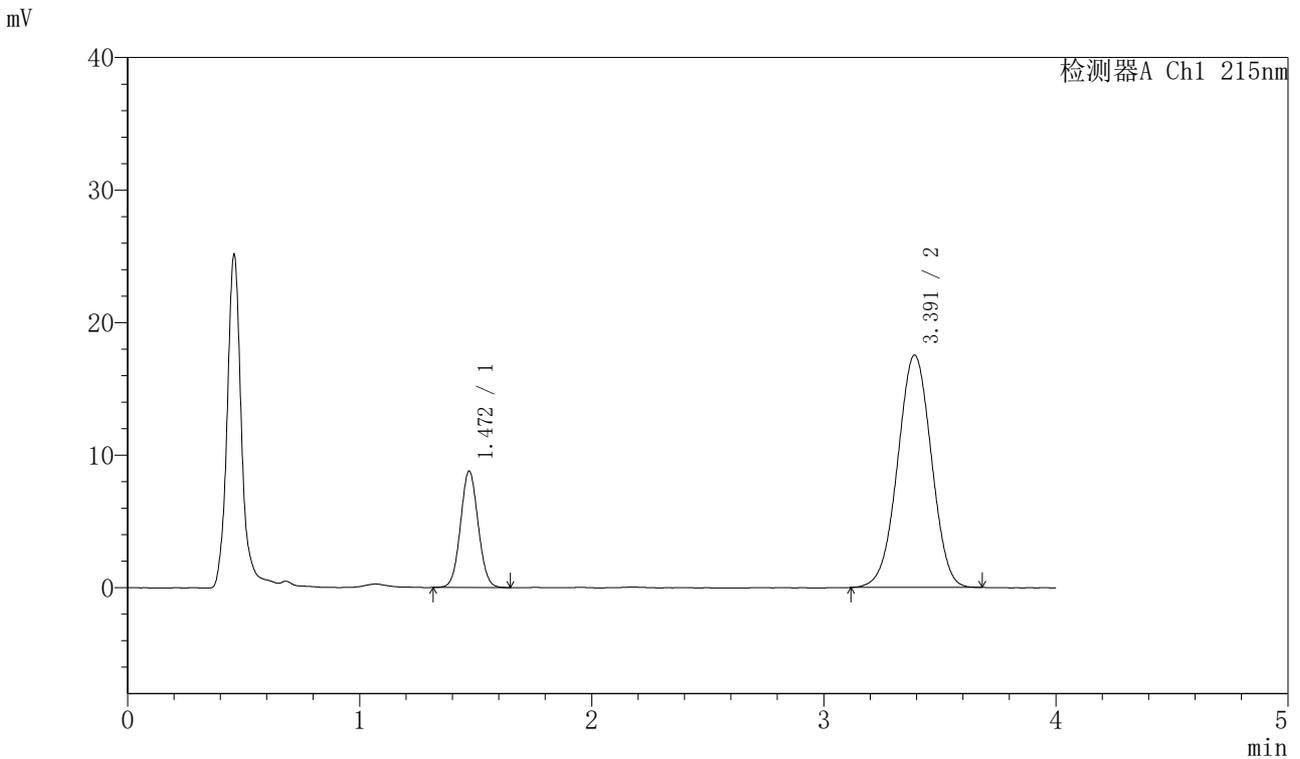

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	46497	20.813	8785	1779	1.054	--
2	3.391	176909	79.187	17517	2597	0.995	9.459
总计		223406	100.000	26302			

图31 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片1
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3709-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 13:58:41 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

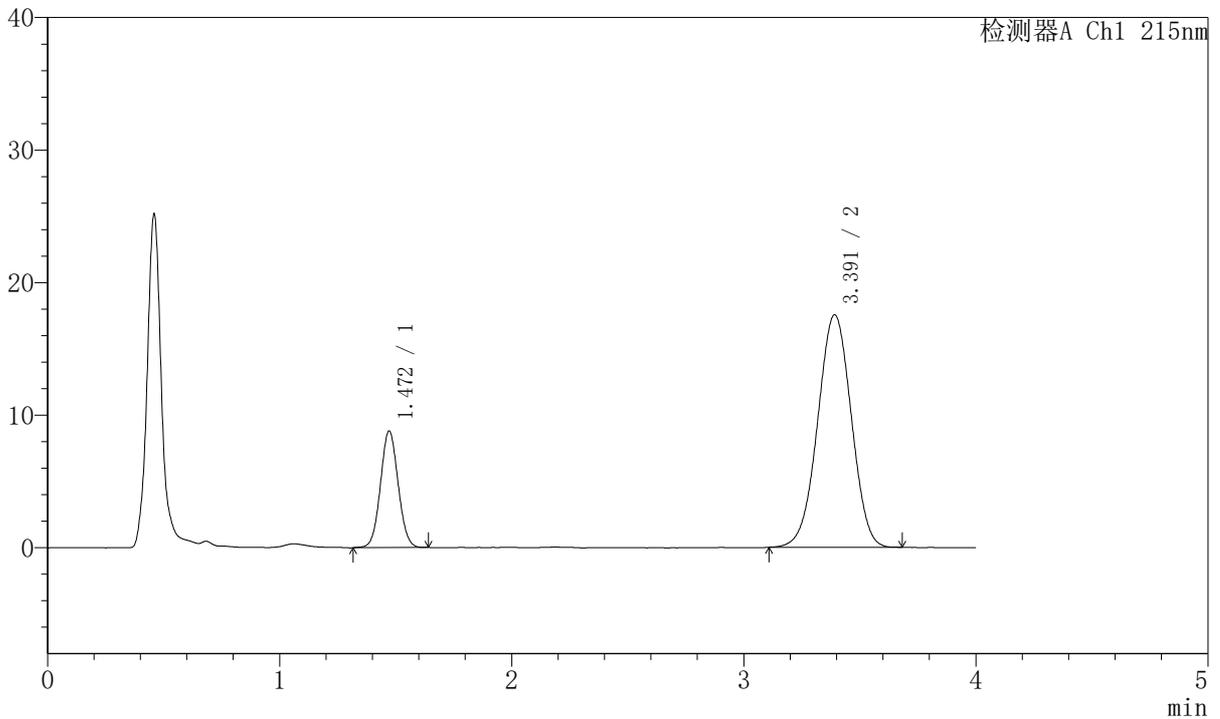

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	46677	20.895	8803	1774	1.053	--
2	3.391	176713	79.105	17528	2602	0.991	9.462
总计		223391	100.000	26330			

图32 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片1
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3710-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 14:03:03 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:33 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

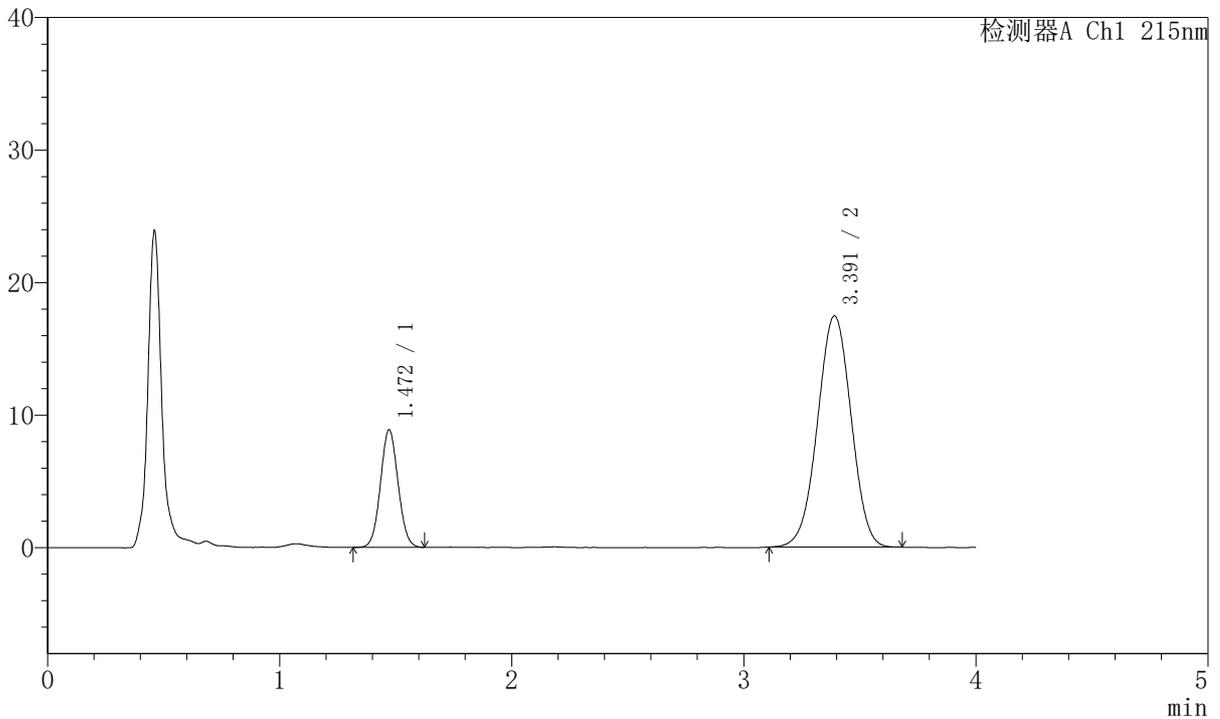

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	46915	21.063	8881	1775	1.058	--
2	3.391	175824	78.937	17439	2605	0.993	9.467
总计		222739	100.000	26320			

图33 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片2
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3711-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 14:07:26 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:36 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

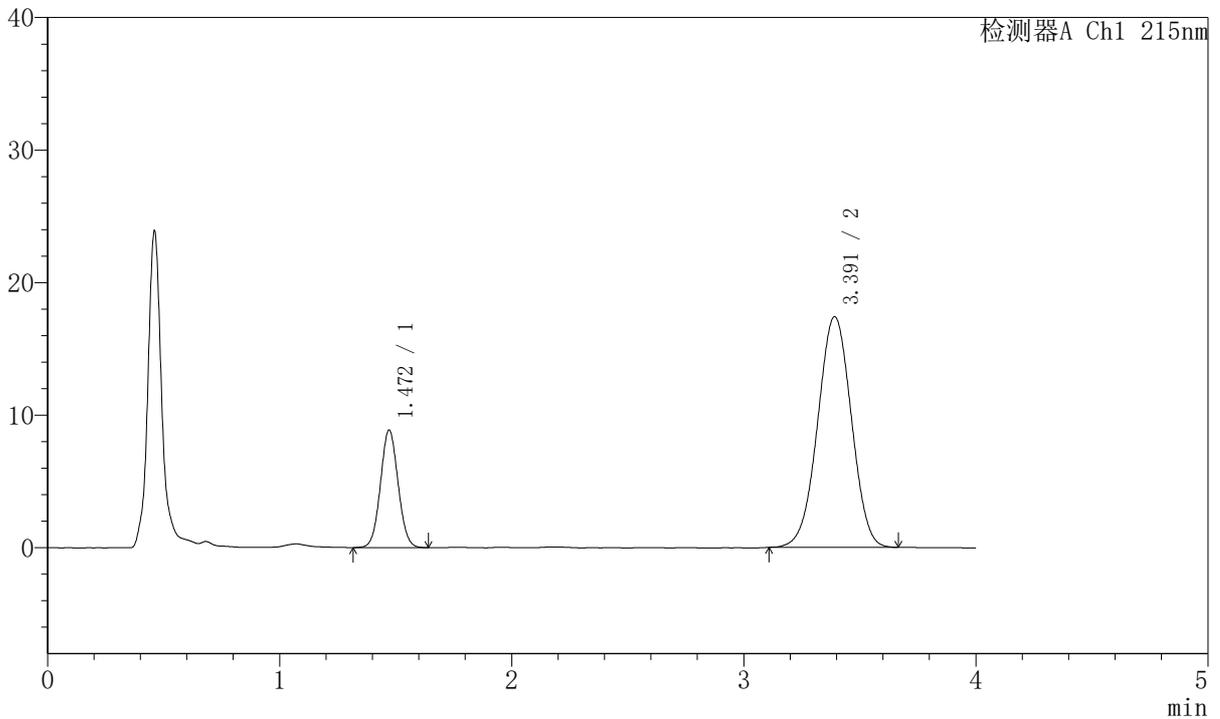

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	46945	21.095	8871	1777	1.054	--
2	3.391	175596	78.905	17388	2593	0.993	9.456
总计		222541	100.000	26259			

图34 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片2
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3712-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 14:11:48 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:39 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

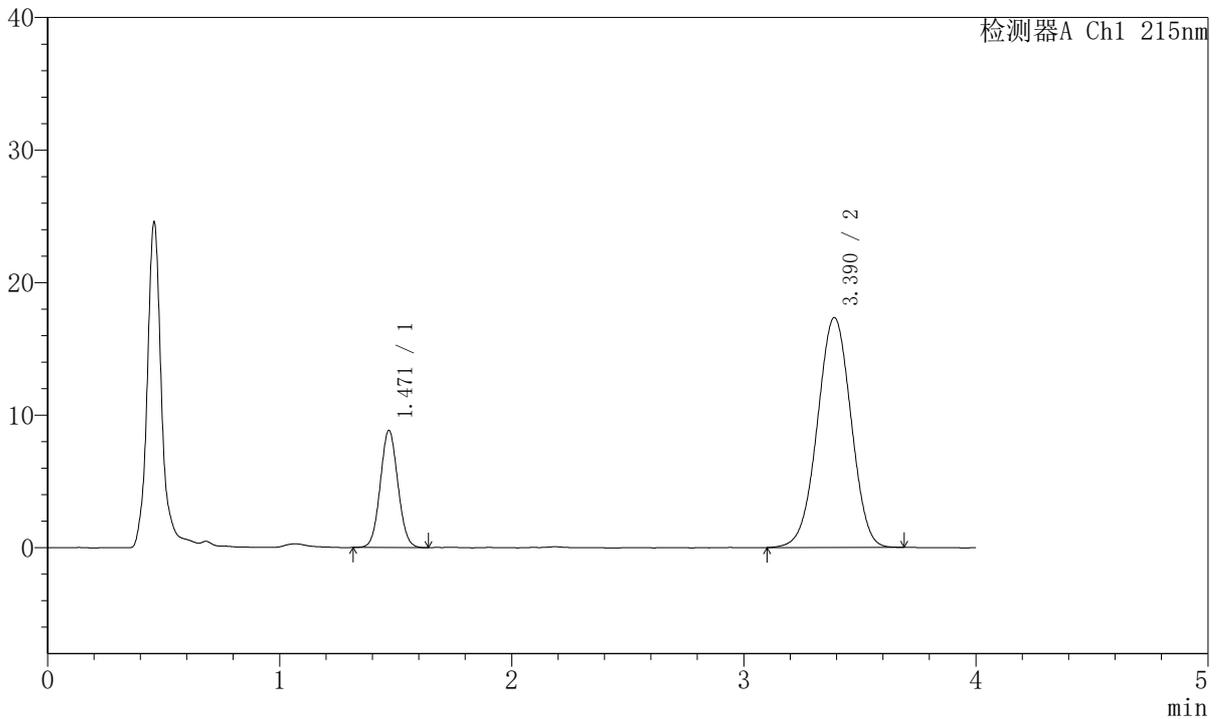

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	46685	21.070	8840	1772	1.058	--
2	3.390	174885	78.930	17344	2606	0.991	9.468
总计		221570	100.000	26184			

图35 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片3
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3713-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 14:16:11 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

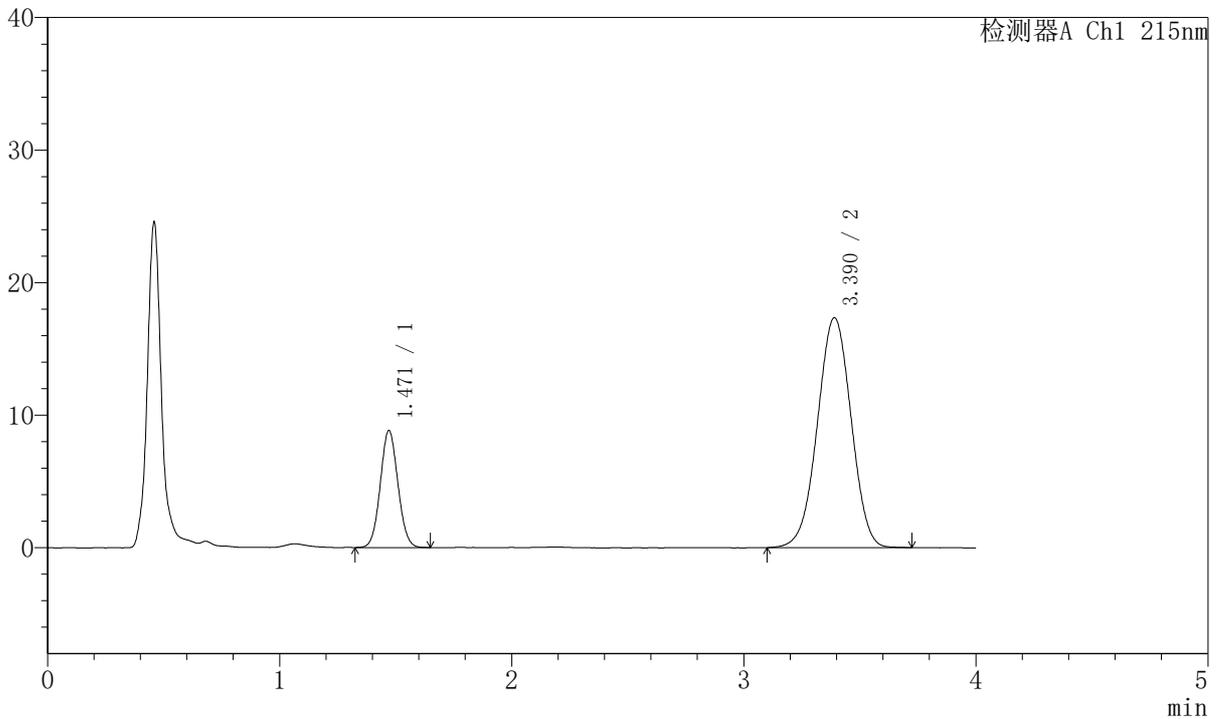

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	46656	21.030	8831	1778	1.061	--
2	3.390	175194	78.970	17335	2592	0.991	9.457
总计		221850	100.000	26166			

图36 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片3
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3714-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 14:20:34 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

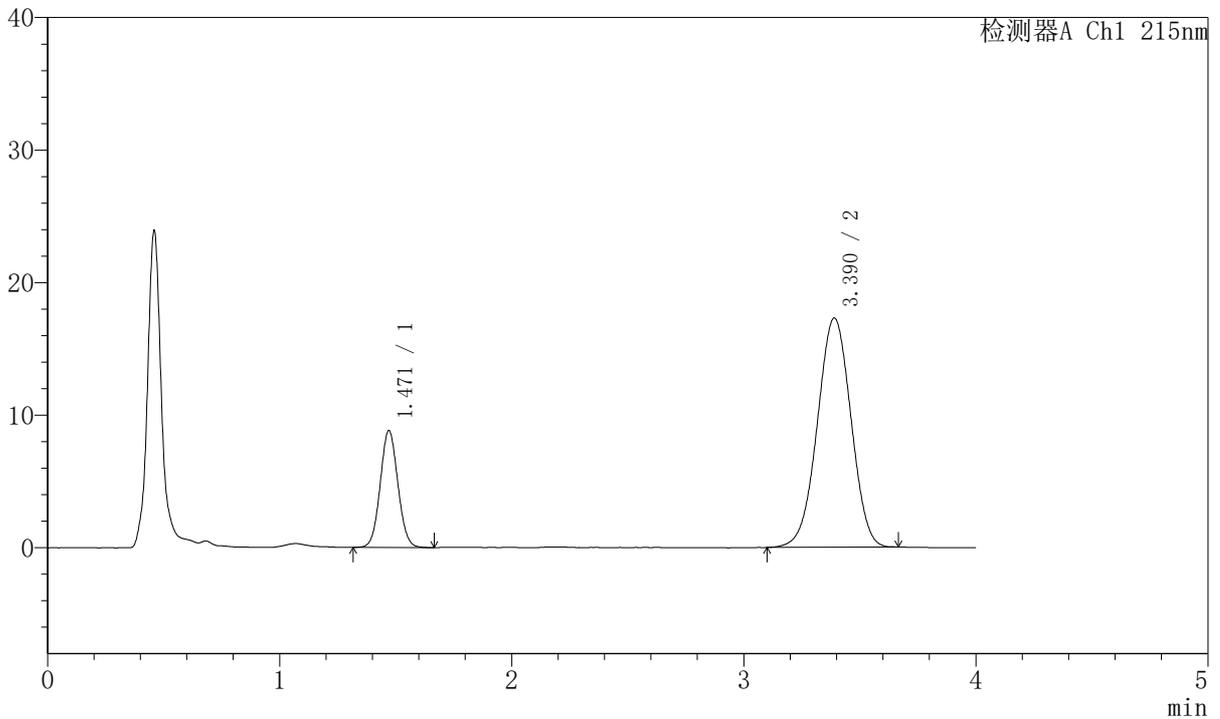

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	46726	21.149	8816	1774	1.061	--
2	3.390	174206	78.851	17289	2595	0.990	9.458
总计		220932	100.000	26105			

图37 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片4
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3715-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 14:24:57 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:46 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

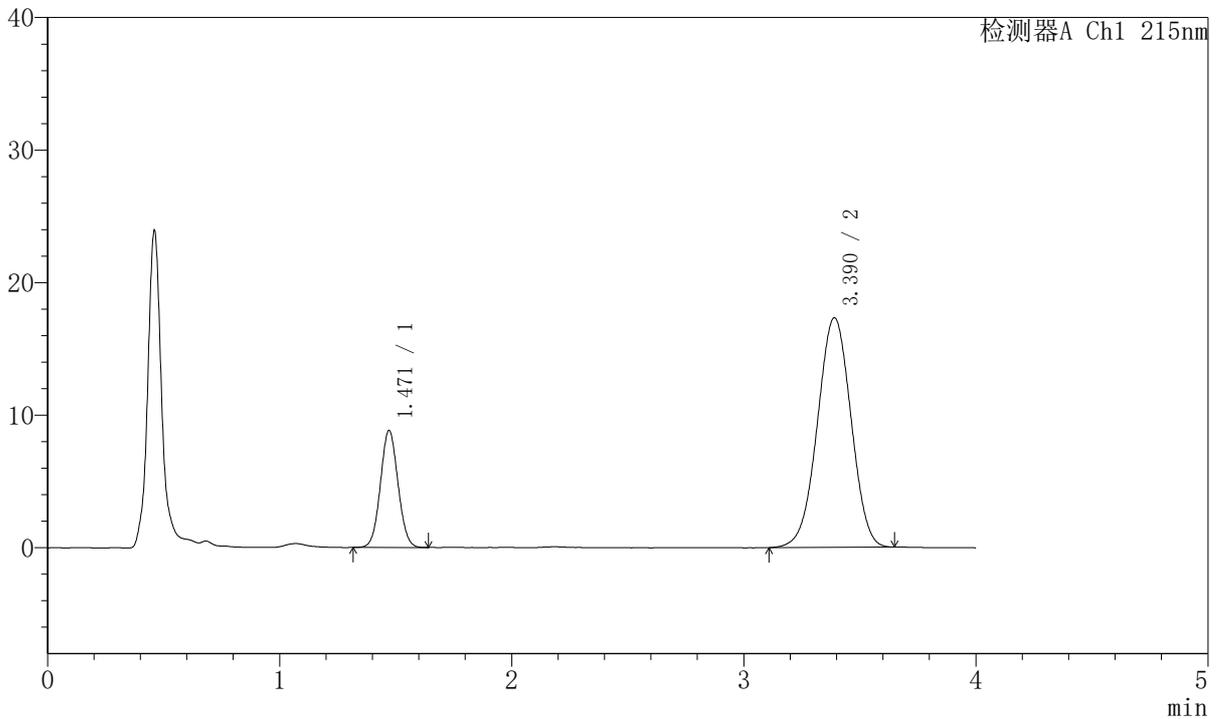

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	46517	21.059	8827	1784	1.056	--
2	3.390	174374	78.941	17316	2605	0.990	9.475
总计		220891	100.000	26143			

图38 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片4
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3716-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 14:29:18 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:49 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

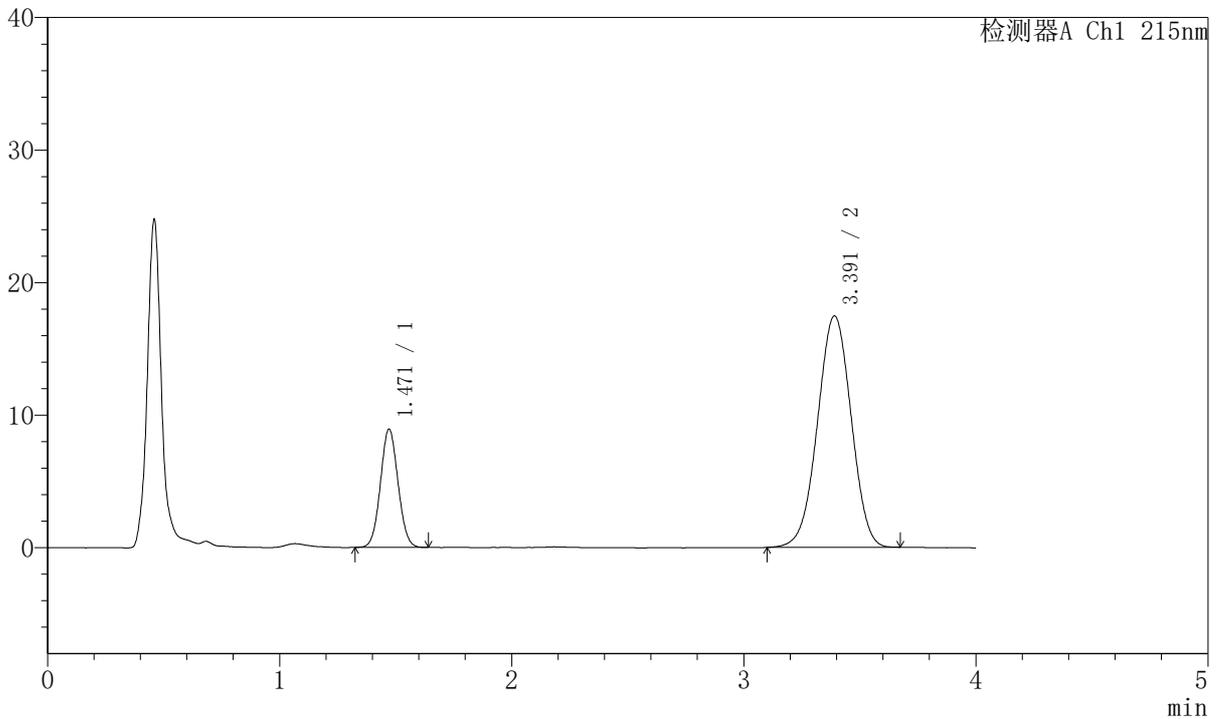

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	47112	21.119	8932	1779	1.054	--
2	3.391	175971	78.881	17451	2595	0.992	9.459
总计		223083	100.000	26383			

图39 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片5
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3717-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 14:33:41 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

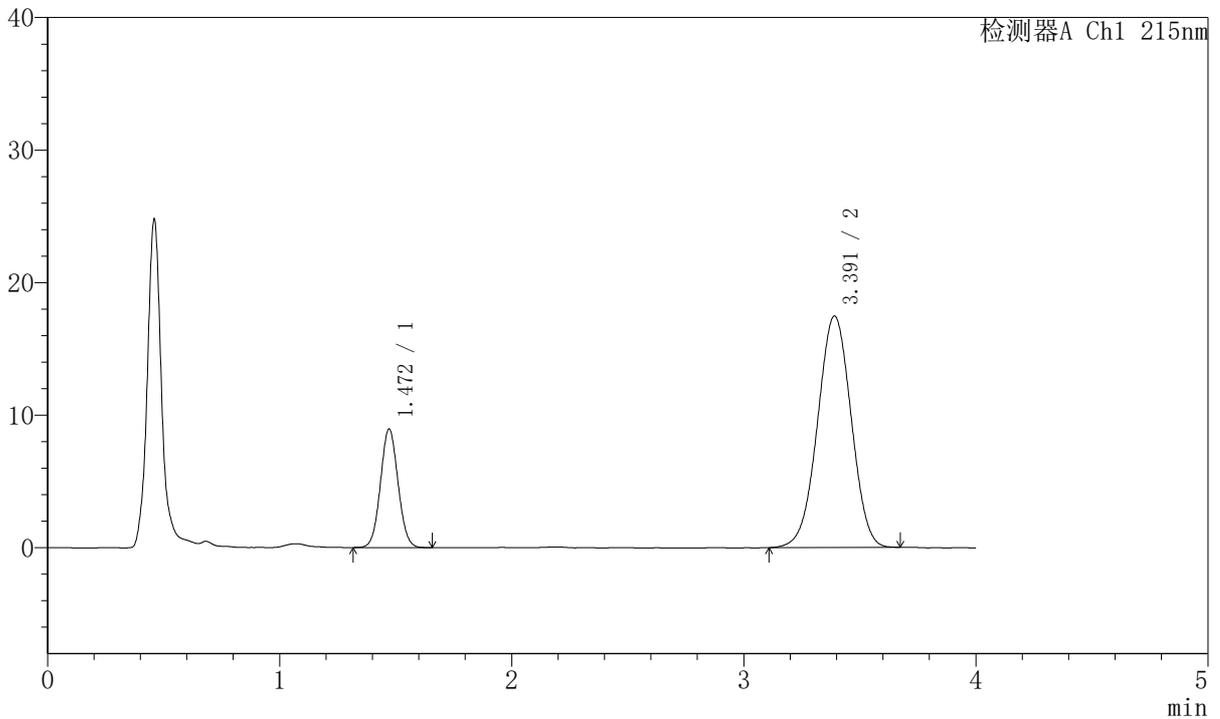

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.472	47340	21.199	8956	1782	1.057	--
2	3.391	175970	78.801	17456	2602	0.993	9.469
总计		223310	100.000	26412			

图40 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片5
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3718-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 14:38:04 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:55 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

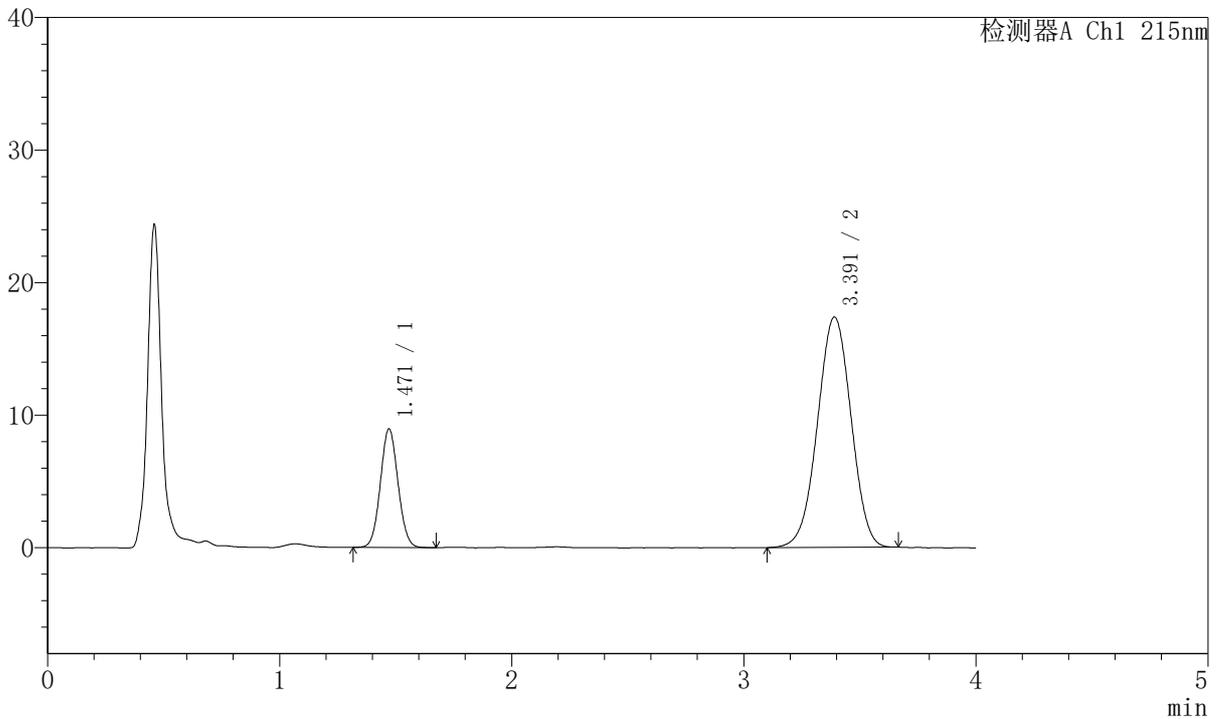

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	47454	21.329	8956	1774	1.062	--
2	3.391	175031	78.671	17372	2594	0.990	9.455
总计		222485	100.000	26328			

图41 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片6
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3719-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 14:42:27 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:35:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

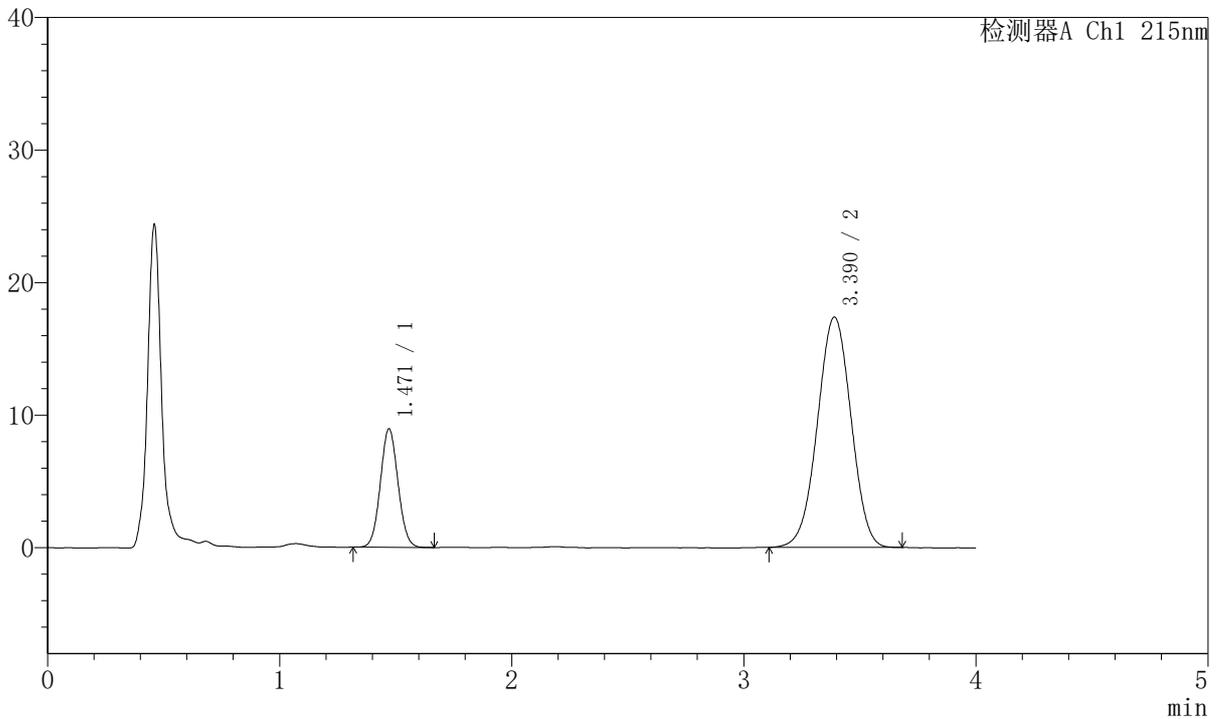

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	47303	21.269	8943	1774	1.062	--
2	3.390	175095	78.731	17373	2604	0.992	9.465
总计		222398	100.000	26317			

图42 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-片6
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3720-2 - zzp-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 14:46:51 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:00 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

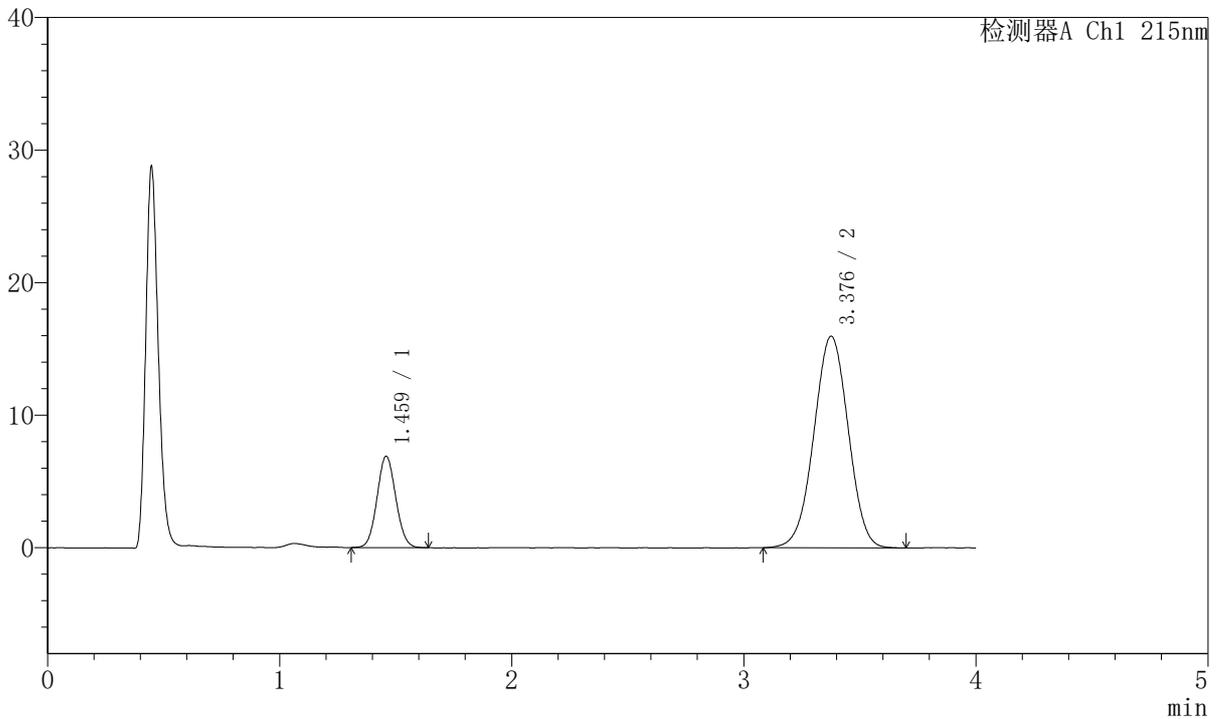

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.459	38682	19.035	6855	1544	1.069	--
2	3.376	164529	80.965	15956	2471	0.995	9.126
总计		203211	100.000	22810			

图43 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(10mg/10mg规格)-pH2.0介质
 对照品溶液-2-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3721-2 - zzp-cq24y-rcd-10mg10mg-pH2.0jz-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 14:51:15 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

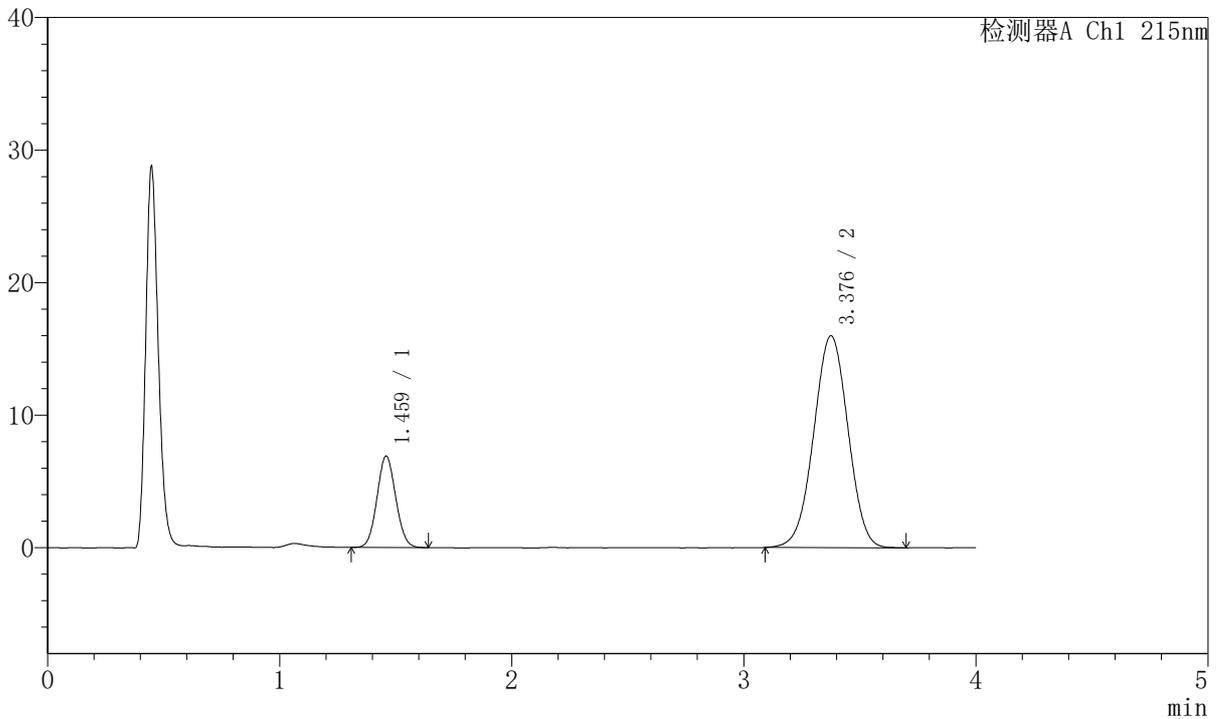

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.459	38760	19.088	6861	1538	1.068	--
2	3.376	164301	80.912	15956	2482	0.995	9.132
总计		203061	100.000	22817			

图44 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(10mg/10mg规格)-pH2.0介质
 对照品溶液-2-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3722-2 - zzp-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-rj.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 14:55:38 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:05 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

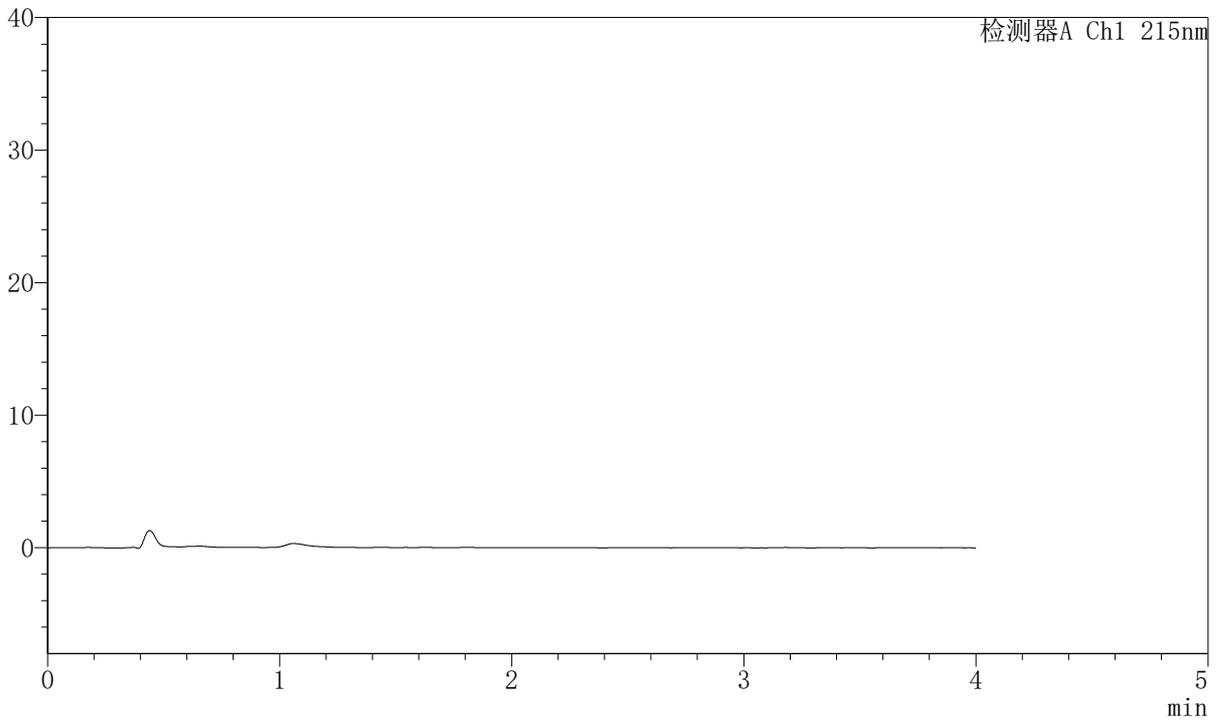

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图45 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速
 溶剂




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3723-2 - zzp-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 15:00:02 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:08 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

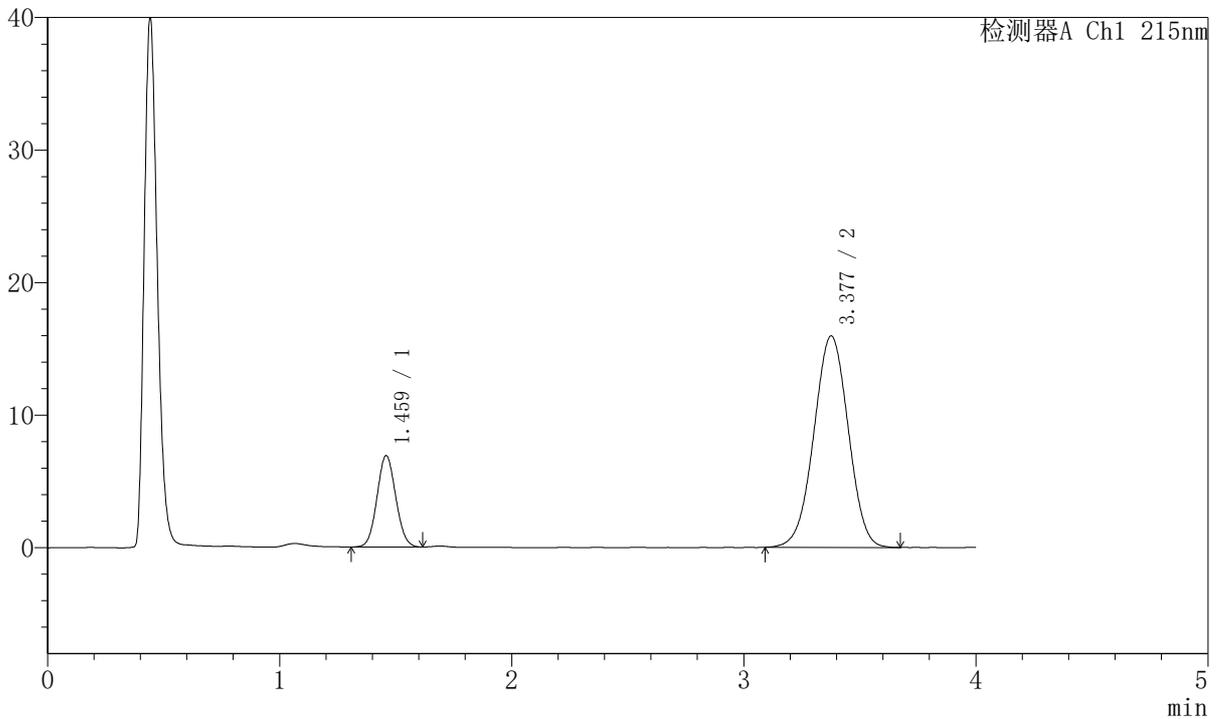

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数 (USP)	拖尾因子	分离度 (USP)
1	1.459	38817	19.121	6863	1532	1.069	--
2	3.377	164188	80.879	15934	2465	0.995	9.106
总计		203005	100.000	22797			

图46 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速
 对照品溶液-1-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3724-2 - zzp-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 15:04:26 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:11 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

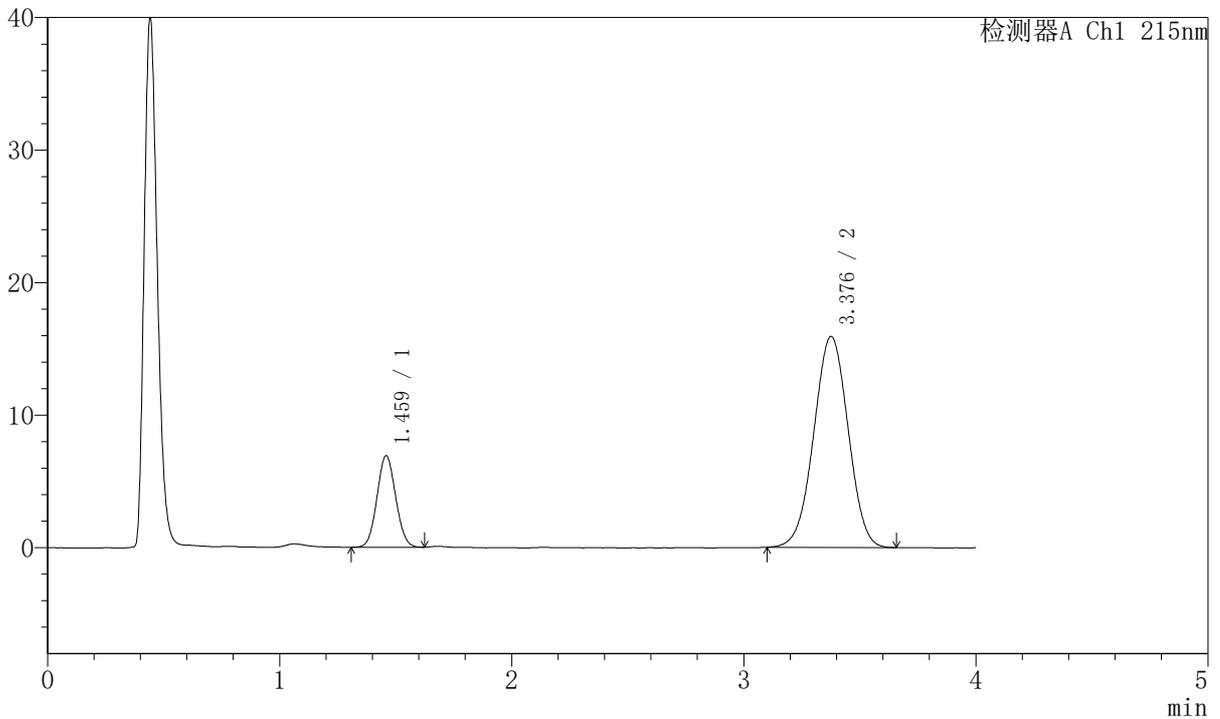

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数 (USP)	拖尾因子	分离度 (USP)
1	1.459	38625	19.082	6865	1545	1.066	--
2	3.376	163791	80.918	15905	2470	0.996	9.125
总计		202417	100.000	22771			

图47 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速
 对照品溶液-1-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3725-2 - zzp-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 15:08:50 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

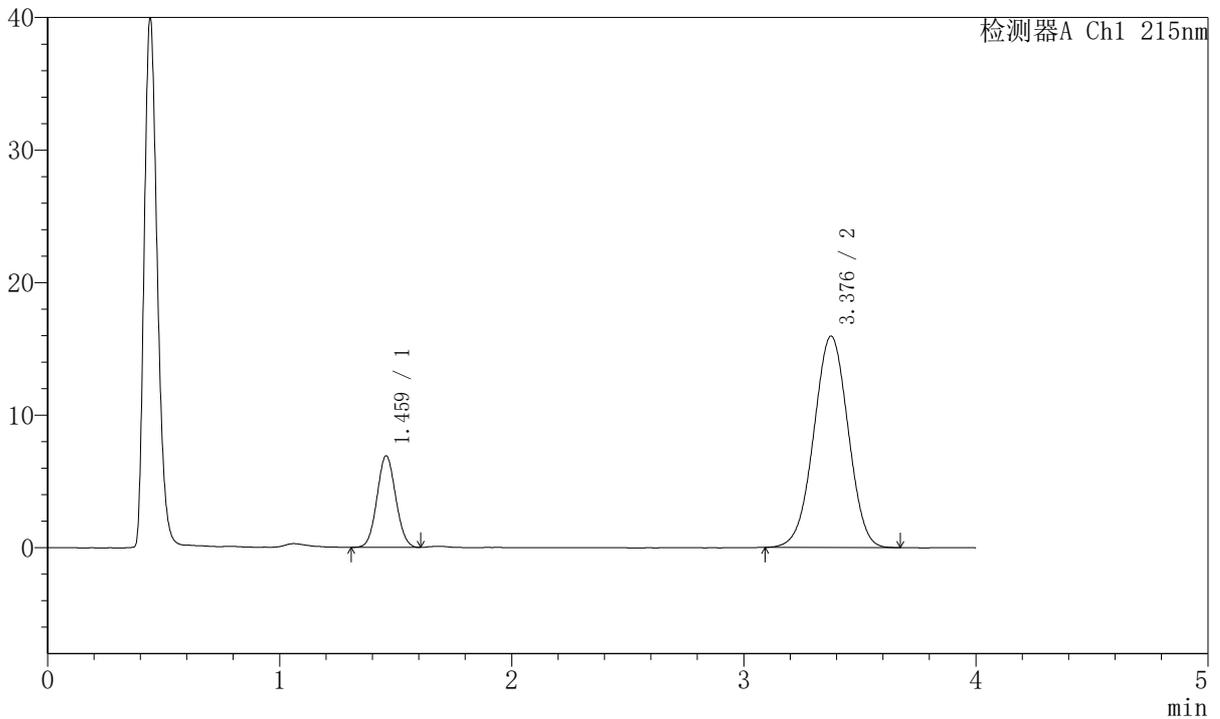

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数 (USP)	拖尾因子	分离度 (USP)
1	1.459	38783	19.114	6873	1541	1.065	--
2	3.376	164115	80.886	15933	2467	0.993	9.118
总计		202897	100.000	22806			

图48 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速
 对照品溶液-1-3




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3726-2 - zzp-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 15:13:14 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:16 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

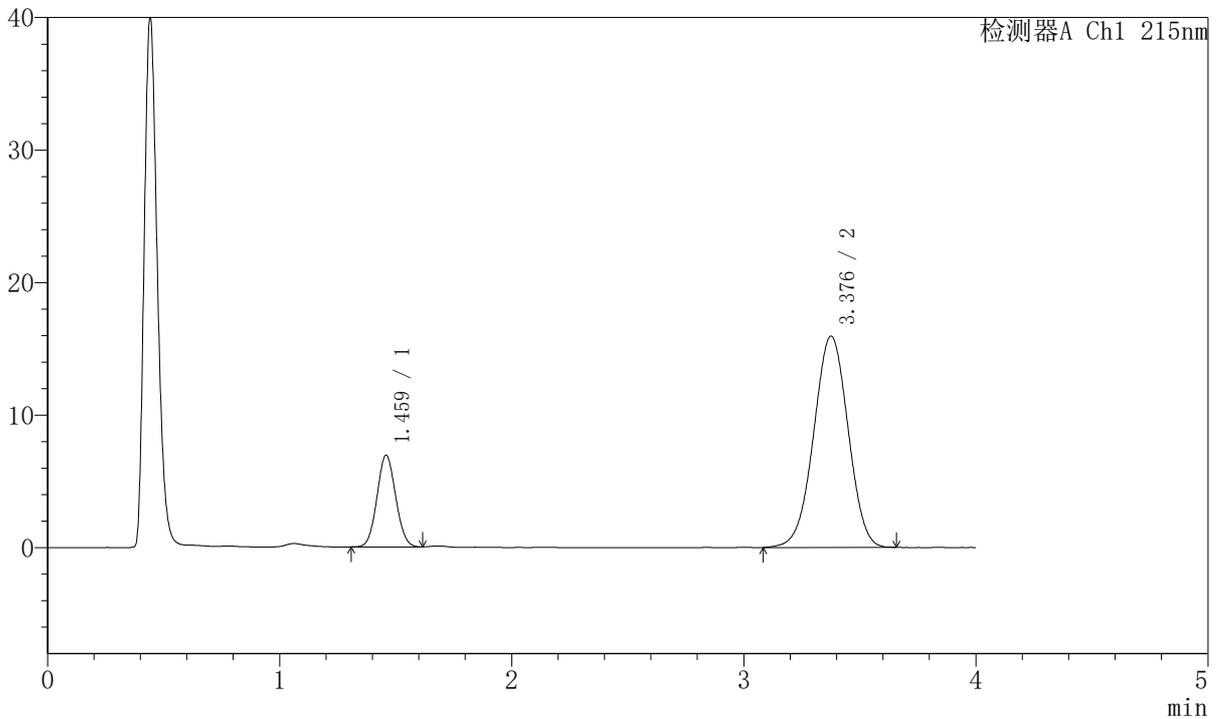

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数 (USP)	拖尾因子	分离度 (USP)
1	1.459	38739	19.097	6882	1537	1.069	--
2	3.376	164114	80.903	15922	2481	0.990	9.132
总计		202853	100.000	22803			

图49 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速
 对照品溶液-1-4




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3727-2 - zzp-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 15:17:38 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

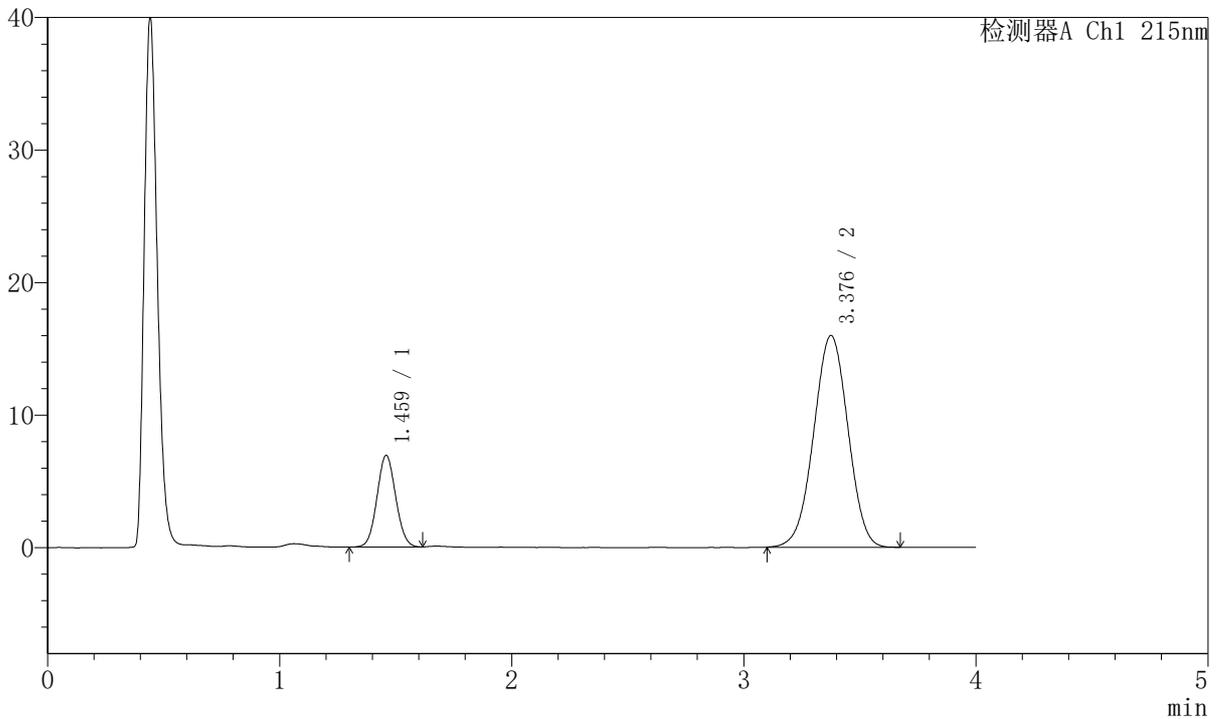

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数 (USP)	拖尾因子	分离度 (USP)
1	1.459	38801	19.134	6876	1542	1.063	--
2	3.376	163984	80.866	15947	2484	0.994	9.138
总计		202785	100.000	22824			

图50 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速
 对照品溶液-1-5




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3728-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 15:22:01 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

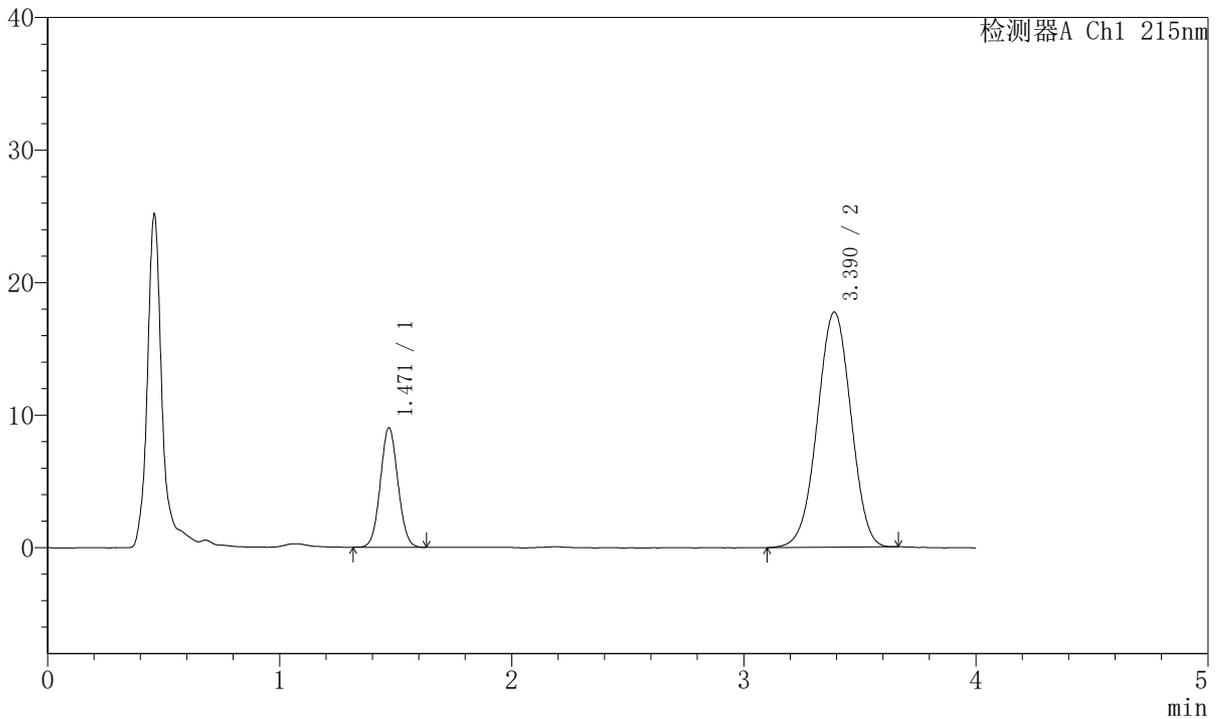

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	47632	21.054	9023	1781	1.056	--
2	3.390	178606	78.946	17741	2603	0.988	9.471
总计		226238	100.000	26764			

图51 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3729-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 15:26:24 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

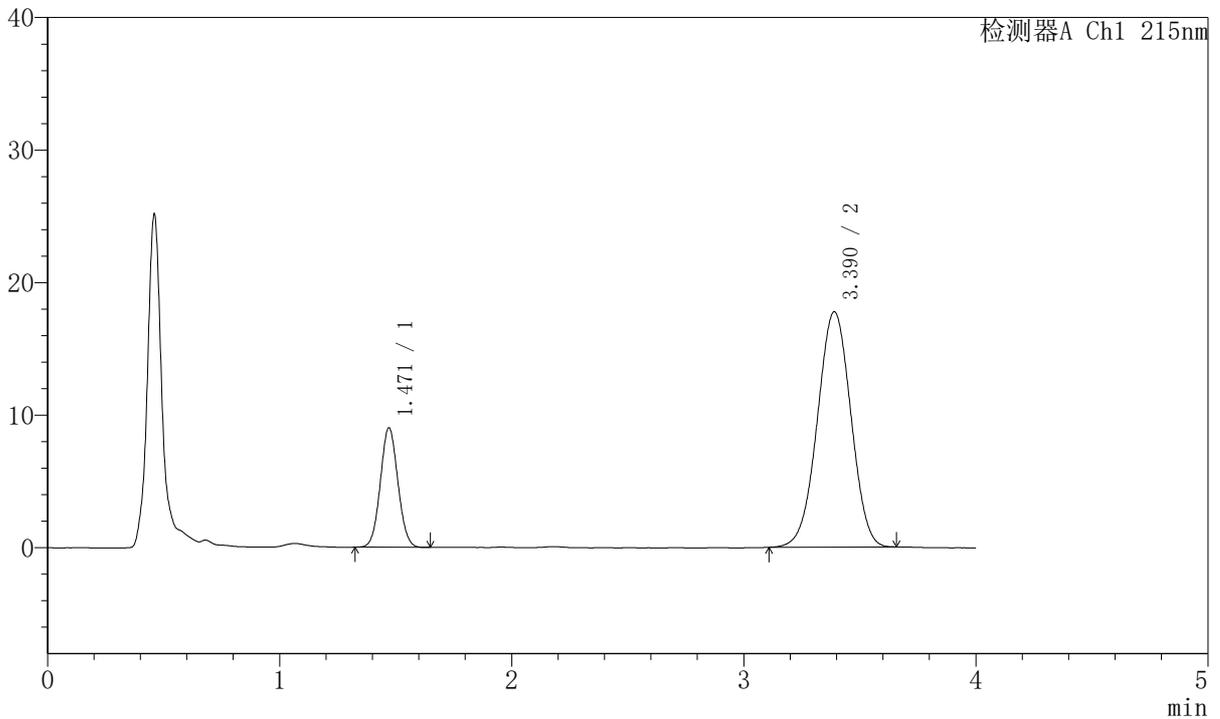

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	47505	21.032	9014	1779	1.058	--
2	3.390	178368	78.968	17754	2614	0.992	9.483
总计		225873	100.000	26768			

图52 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片1
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3730-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 15:30:47 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

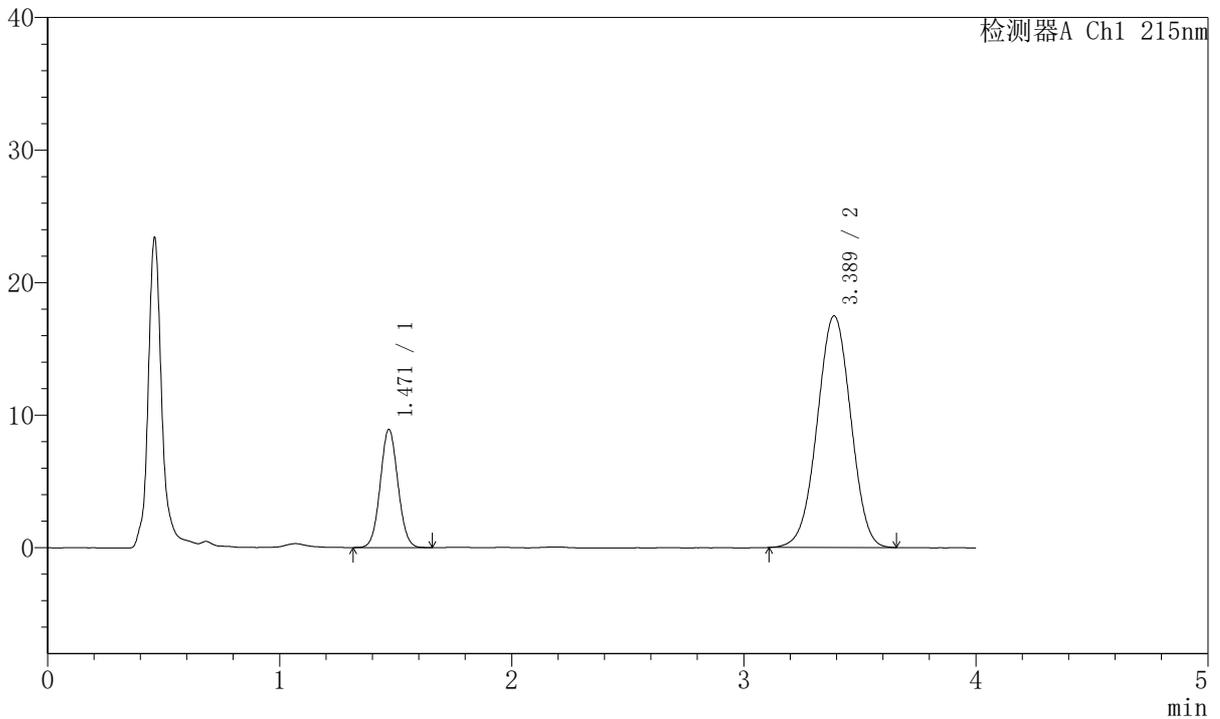

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	47308	21.187	8924	1776	1.056	--
2	3.389	175985	78.813	17482	2605	0.993	9.469
总计		223293	100.000	26406			

图53 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3731-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 15:35:10 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

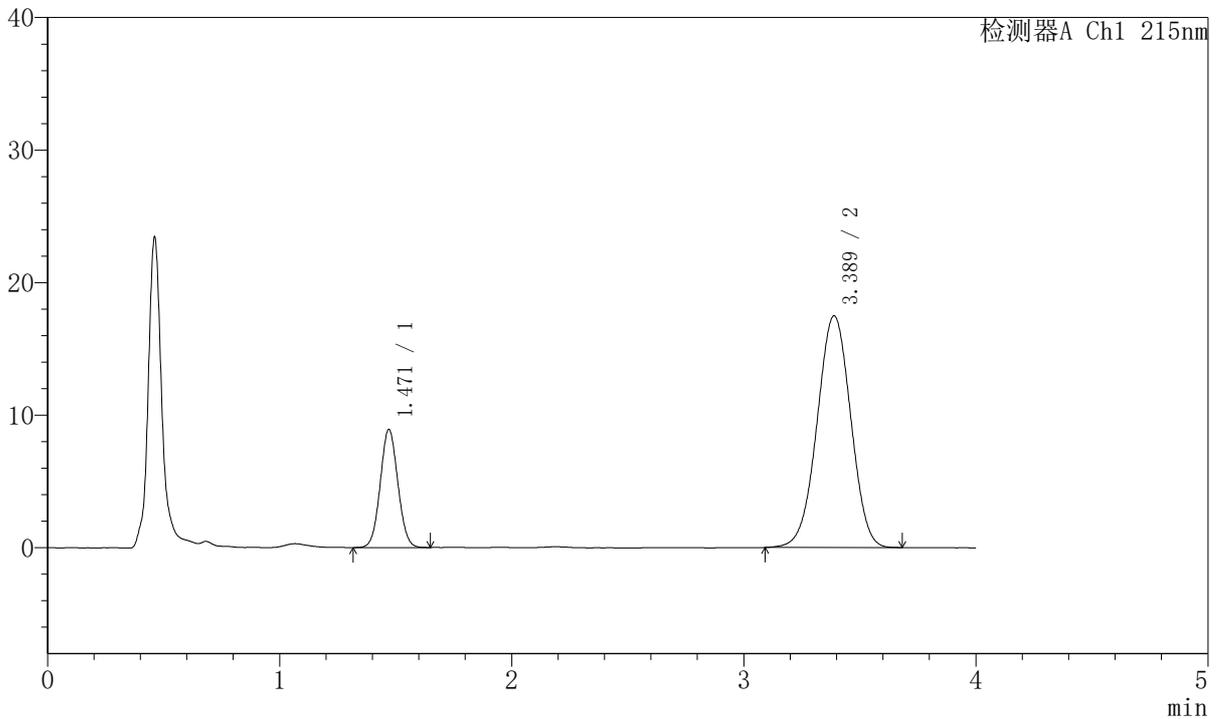

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	47110	21.080	8915	1770	1.054	--
2	3.389	176373	78.920	17489	2600	0.990	9.457
总计		223483	100.000	26404			

图54 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片2
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3732-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 15:39:33 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

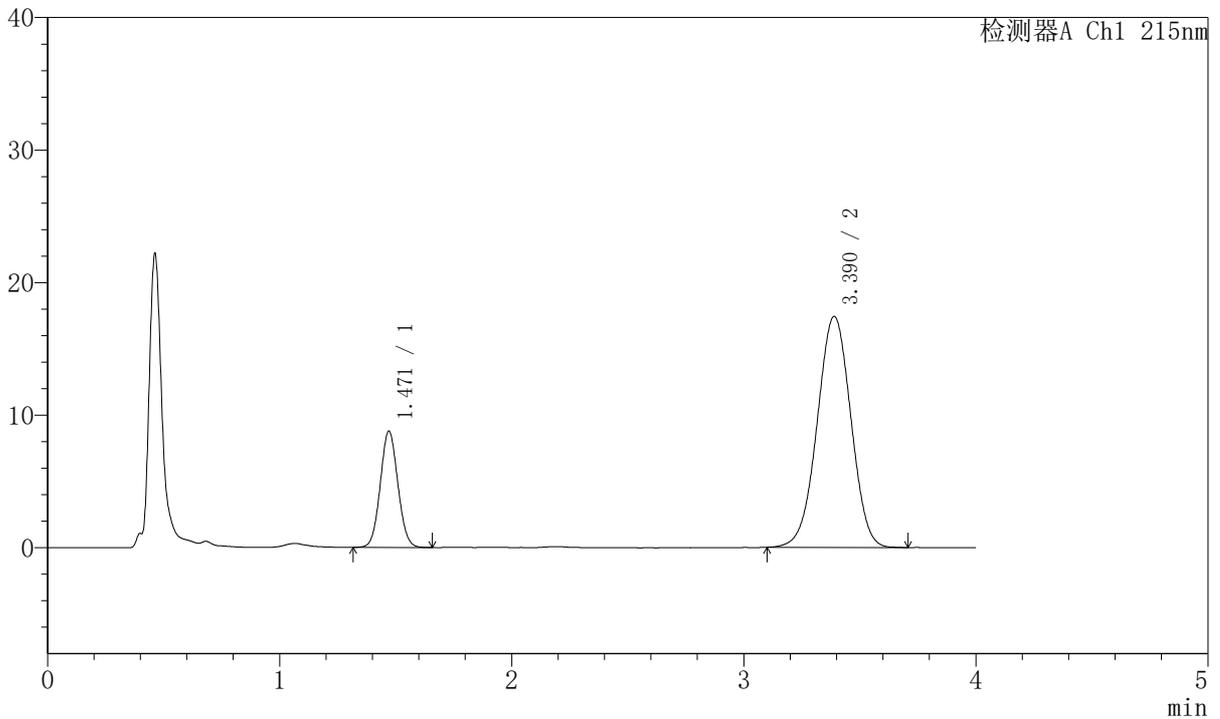

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	46337	20.826	8771	1780	1.061	--
2	3.390	176155	79.174	17432	2600	0.991	9.467
总计		222492	100.000	26202			

图55 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3733-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 15:43:56 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:35 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

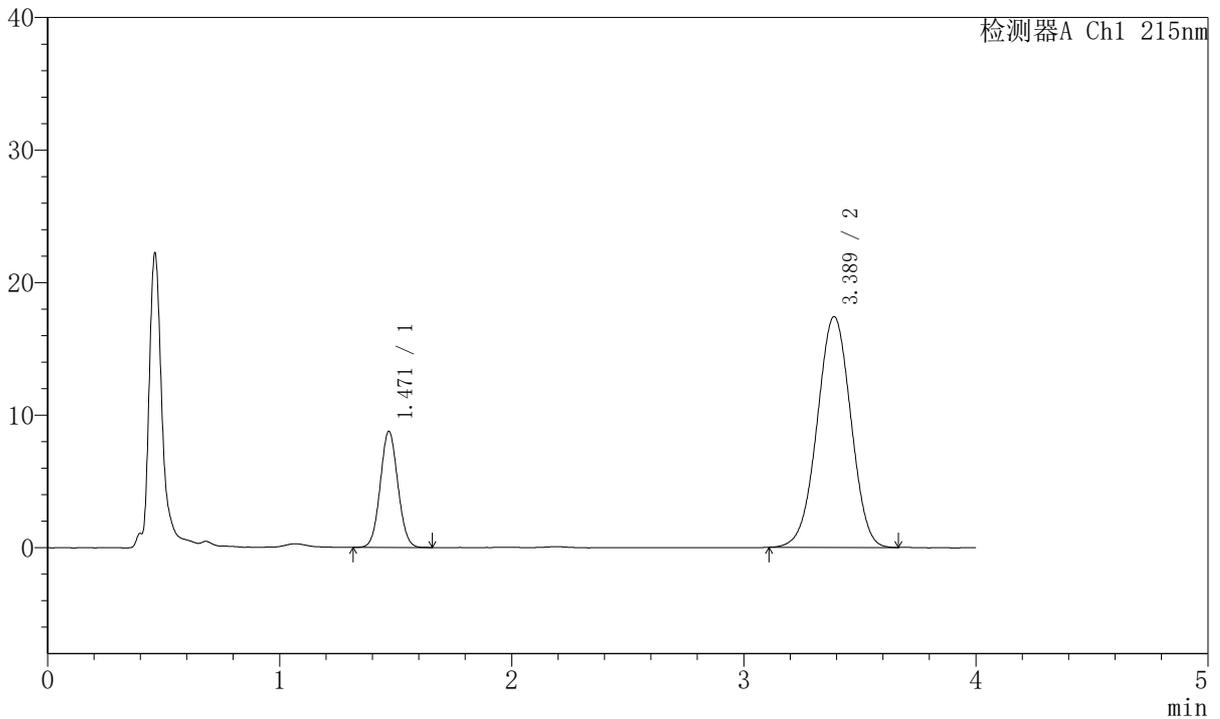

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	46324	20.863	8767	1782	1.059	--
2	3.389	175713	79.137	17412	2592	0.991	9.458
总计		222037	100.000	26179			

图56 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片3
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3734-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 15:48:18 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

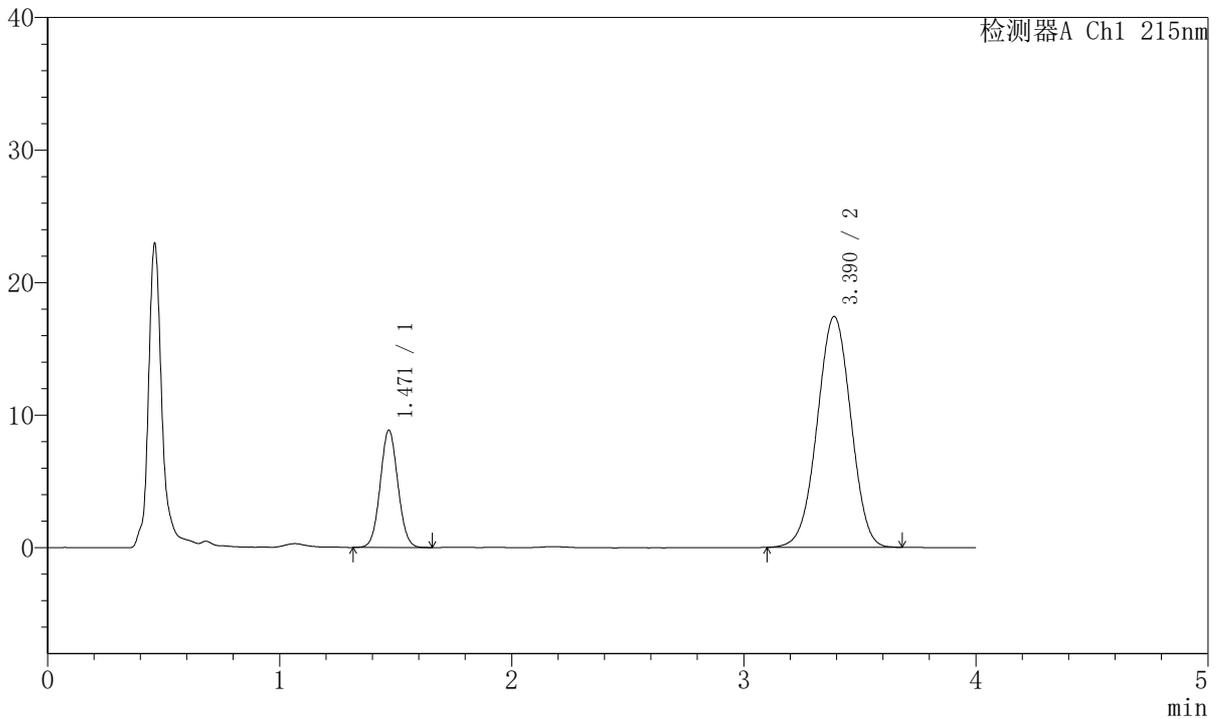

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	46972	21.112	8854	1772	1.058	--
2	3.390	175521	78.888	17414	2602	0.991	9.463
总计		222493	100.000	26268			

图57 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3735-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 15:52:40 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:40 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

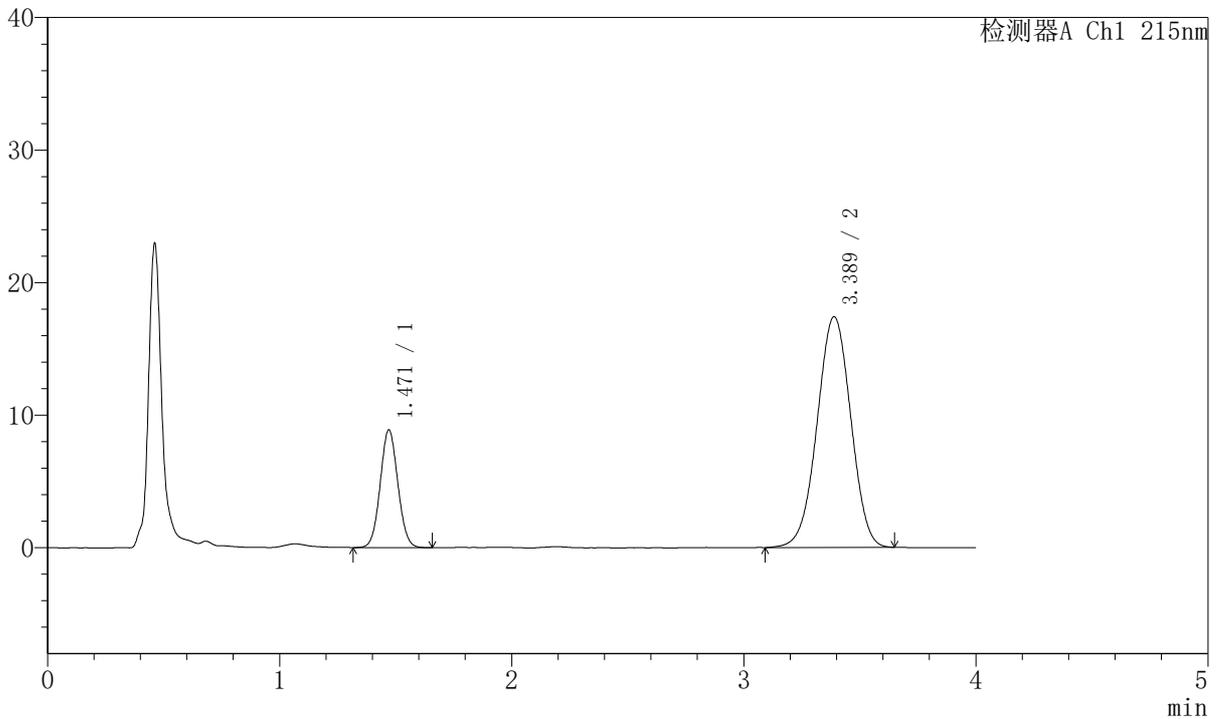

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	47028	21.134	8885	1777	1.059	--
2	3.389	175495	78.866	17409	2605	0.990	9.470
总计		222522	100.000	26294			

图58 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片4
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3736-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 15:57:03 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:42 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

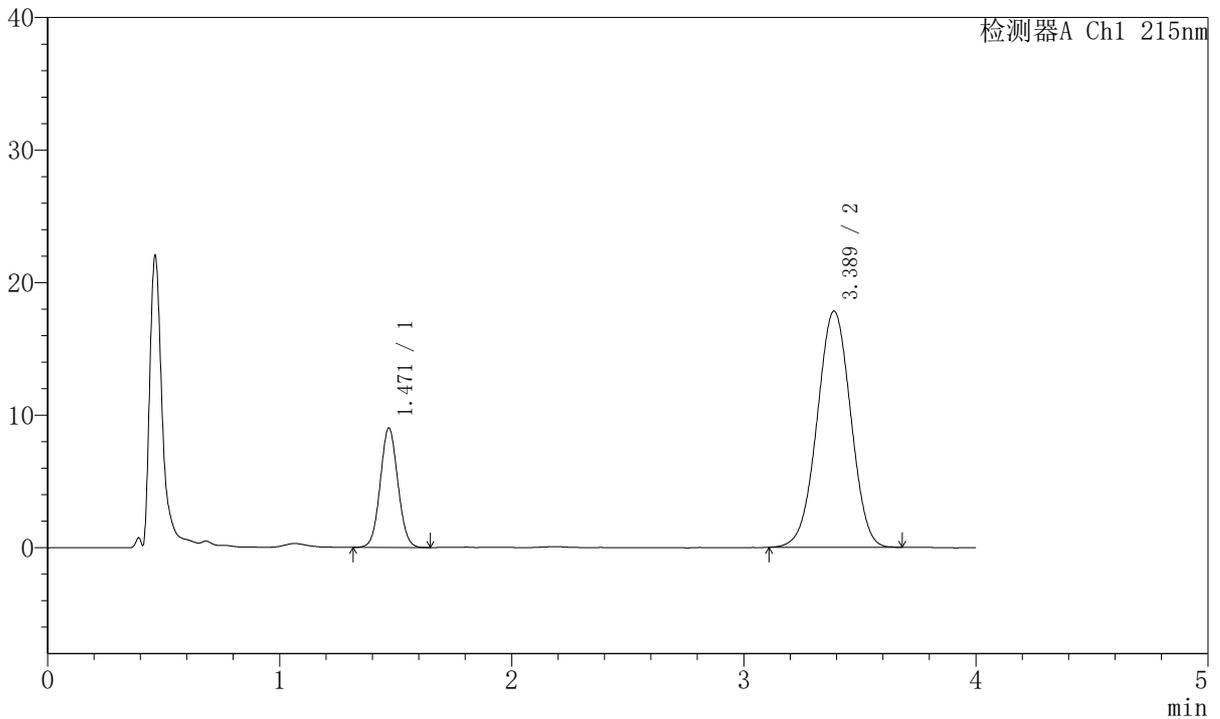

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	47704	20.981	9009	1778	1.057	--
2	3.389	179664	79.019	17827	2602	0.995	9.466
总计		227367	100.000	26836			

图59 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3737-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 16:01:26 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:45 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

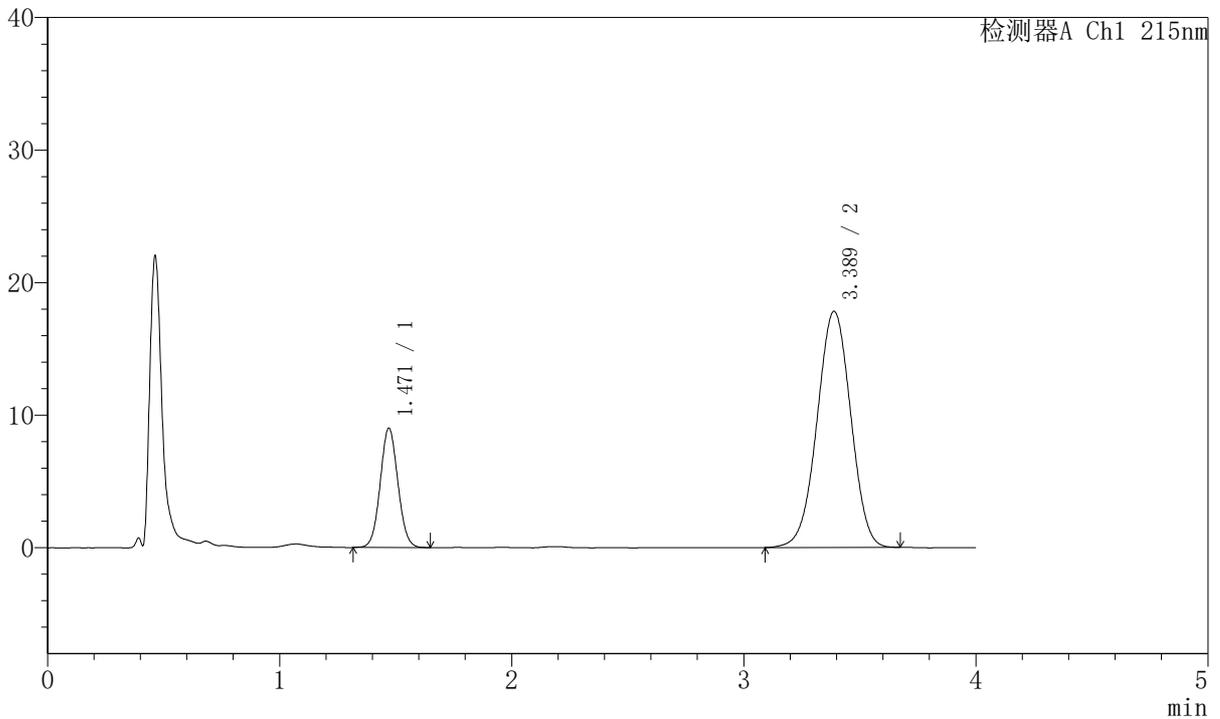

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	47753	20.994	9011	1775	1.058	--
2	3.389	179708	79.006	17816	2598	0.990	9.459
总计		227461	100.000	26827			

图60 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片5
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3738-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 16:05:49 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:48 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

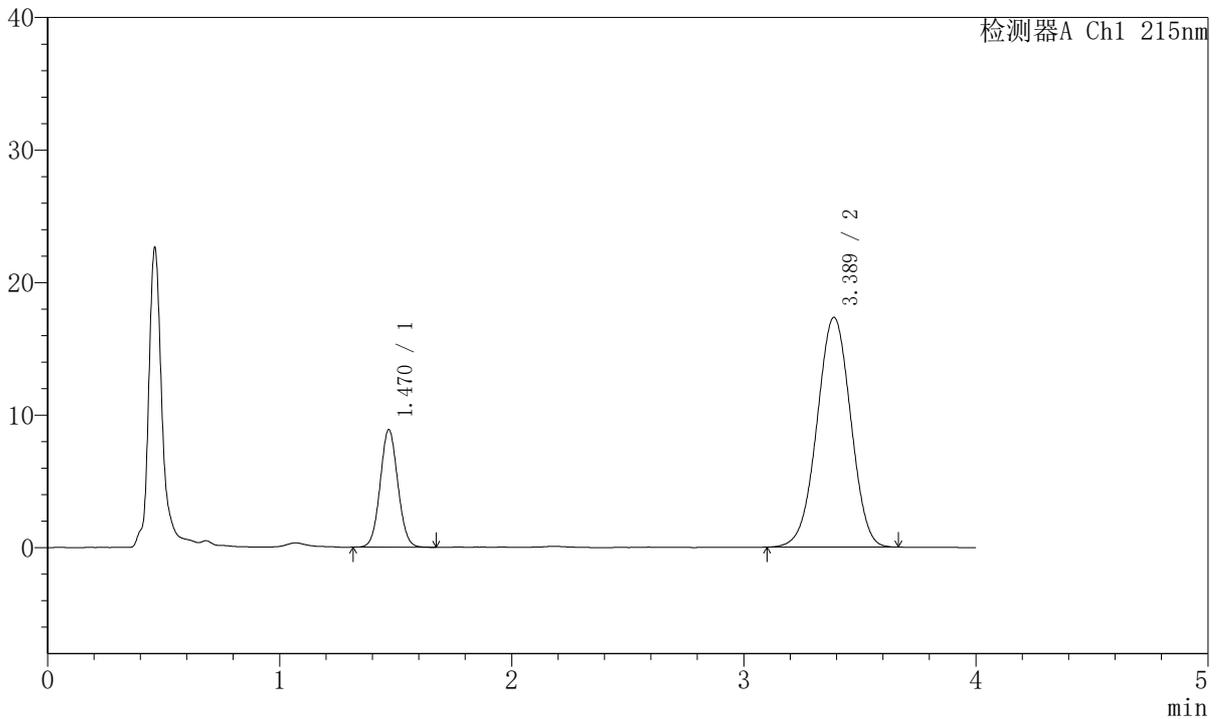

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	47064	21.197	8873	1778	1.058	--
2	3.389	174971	78.803	17330	2589	0.992	9.452
总计		222035	100.000	26203			

图61 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3739-2 - zzp-2022081001p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 16:10:11 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

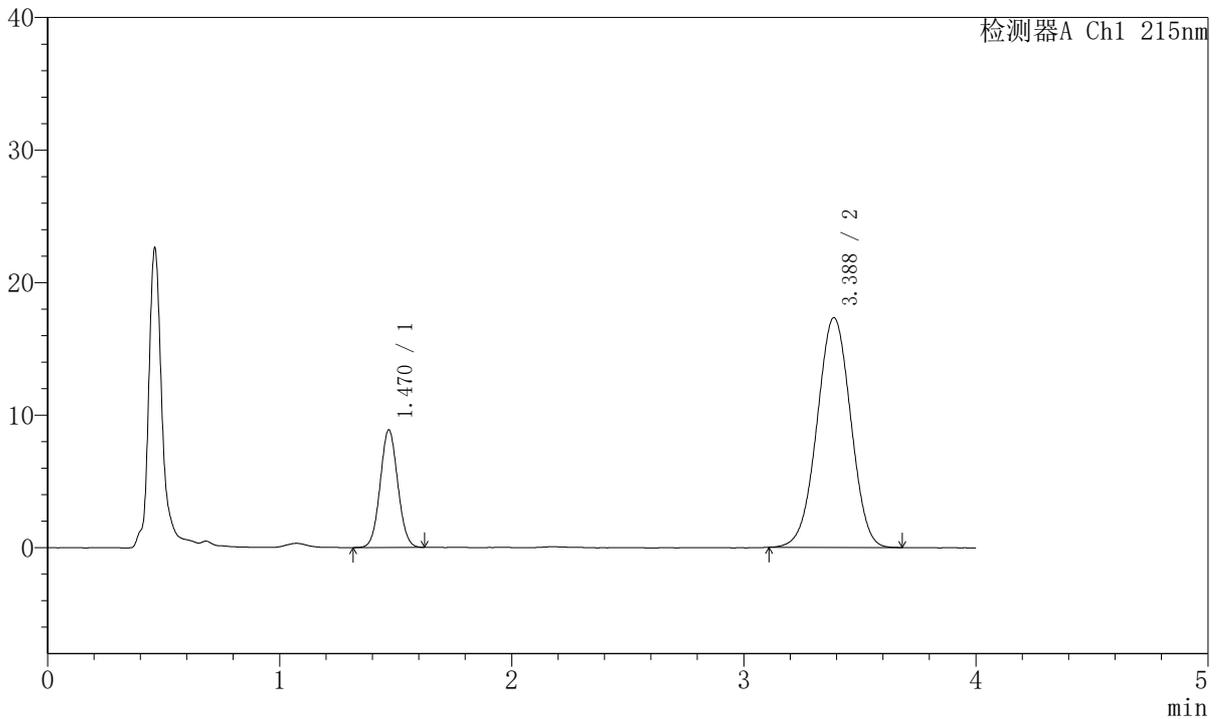

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	46835	21.122	8872	1780	1.056	--
2	3.388	174895	78.878	17337	2592	0.995	9.457
总计		221729	100.000	26209			

图62 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081001批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片6
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3740-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 16:14:33 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:53 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

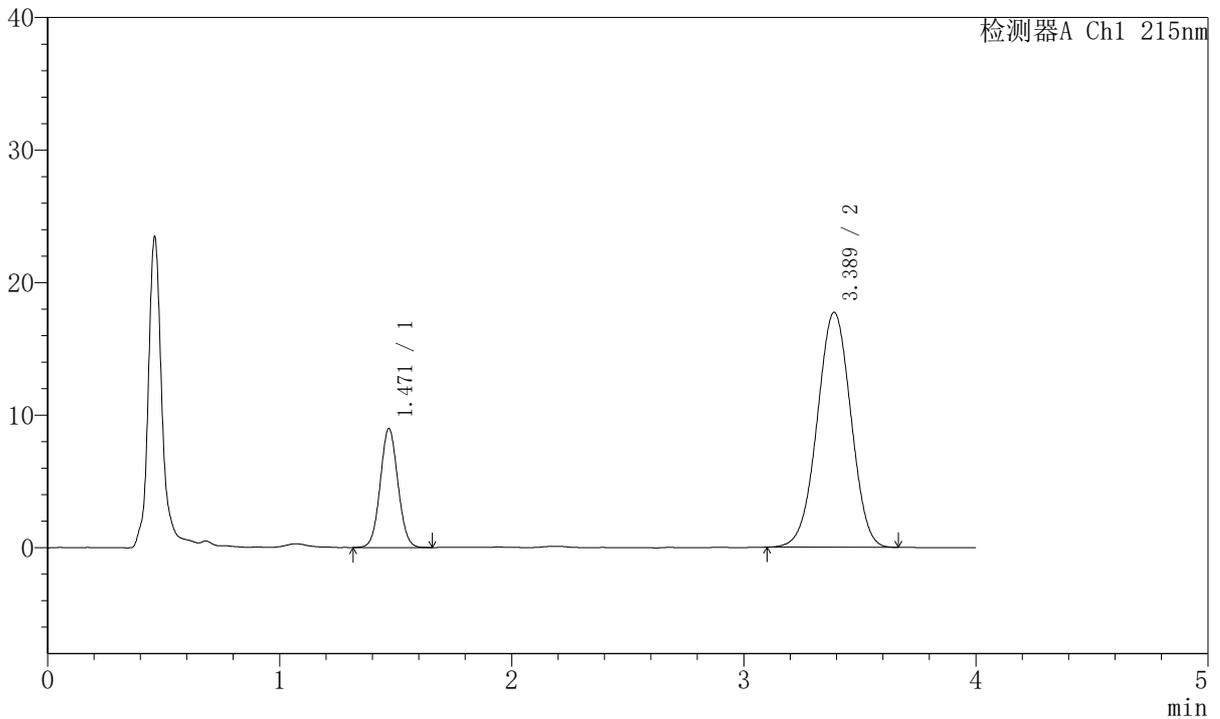

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	47692	21.043	8980	1770	1.055	--
2	3.389	178955	78.957	17730	2588	0.992	9.443
总计		226647	100.000	26710			

图63 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3741-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 16:18:56 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

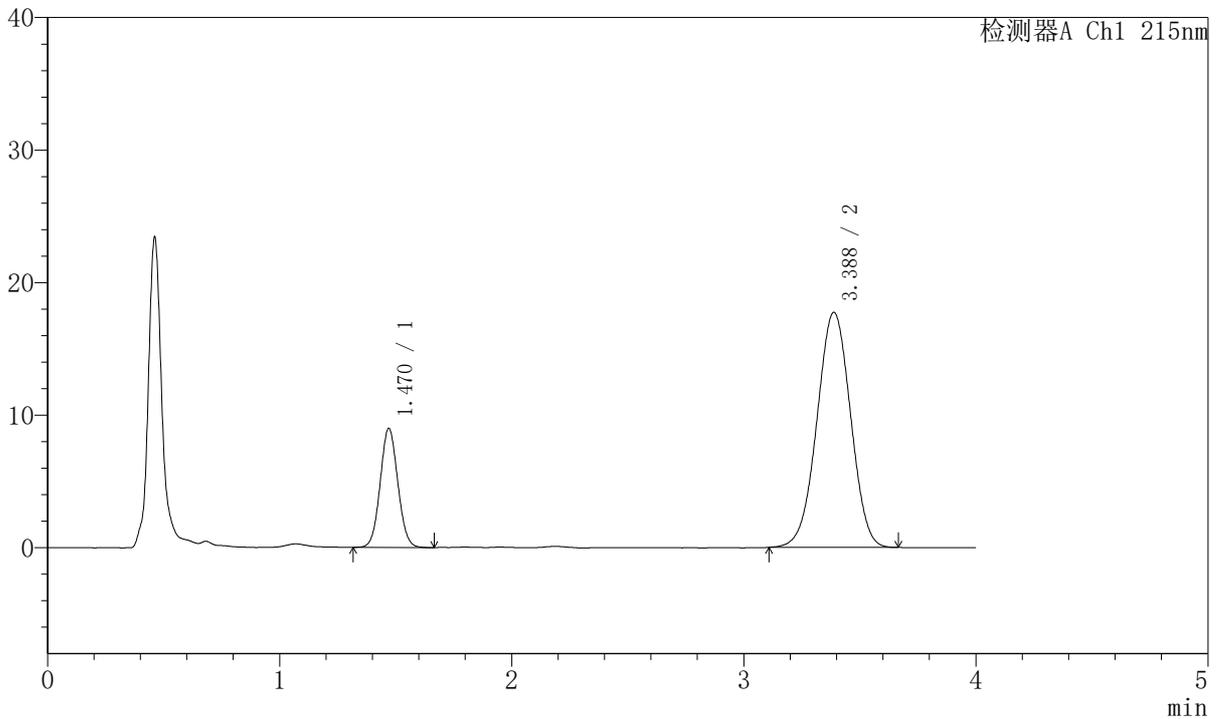

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	47564	21.020	8985	1778	1.059	--
2	3.388	178716	78.980	17733	2600	0.993	9.463
总计		226280	100.000	26719			

图64 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片1
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3742-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 16:23:19 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:36:58 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

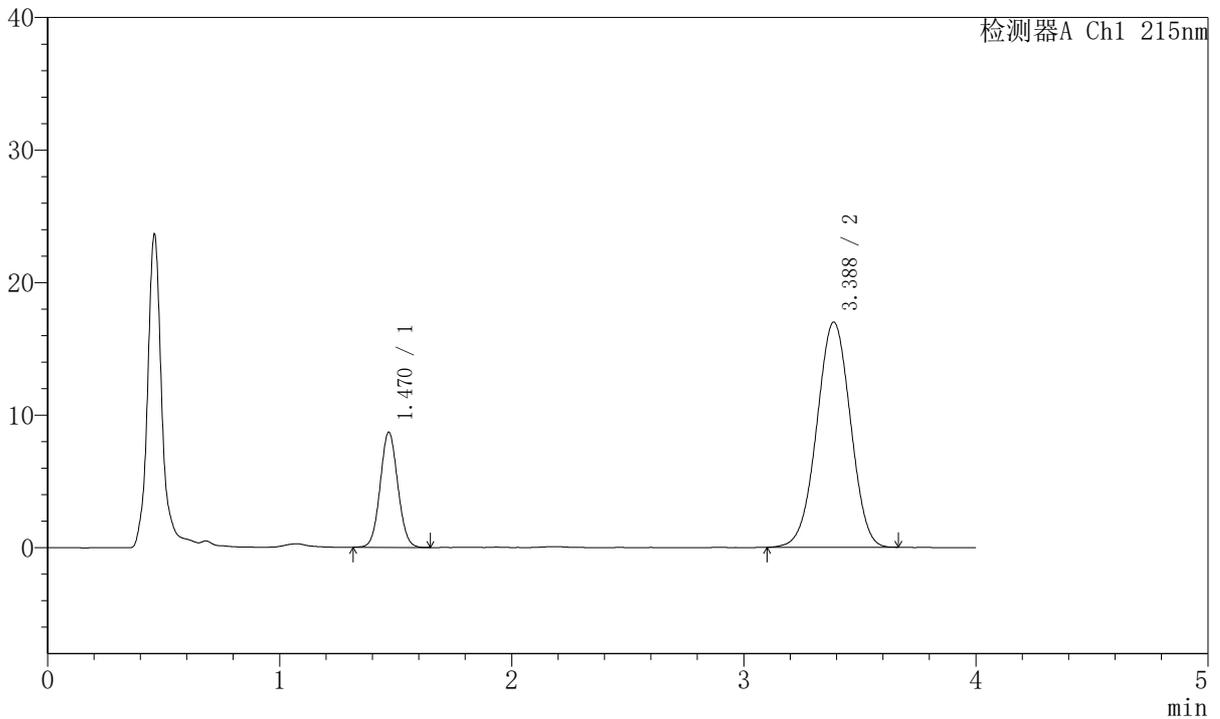

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	45934	21.143	8688	1783	1.059	--
2	3.388	171324	78.857	16990	2586	0.991	9.451
总计		217259	100.000	25679			

图65 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3743-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 16:27:42 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:01 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

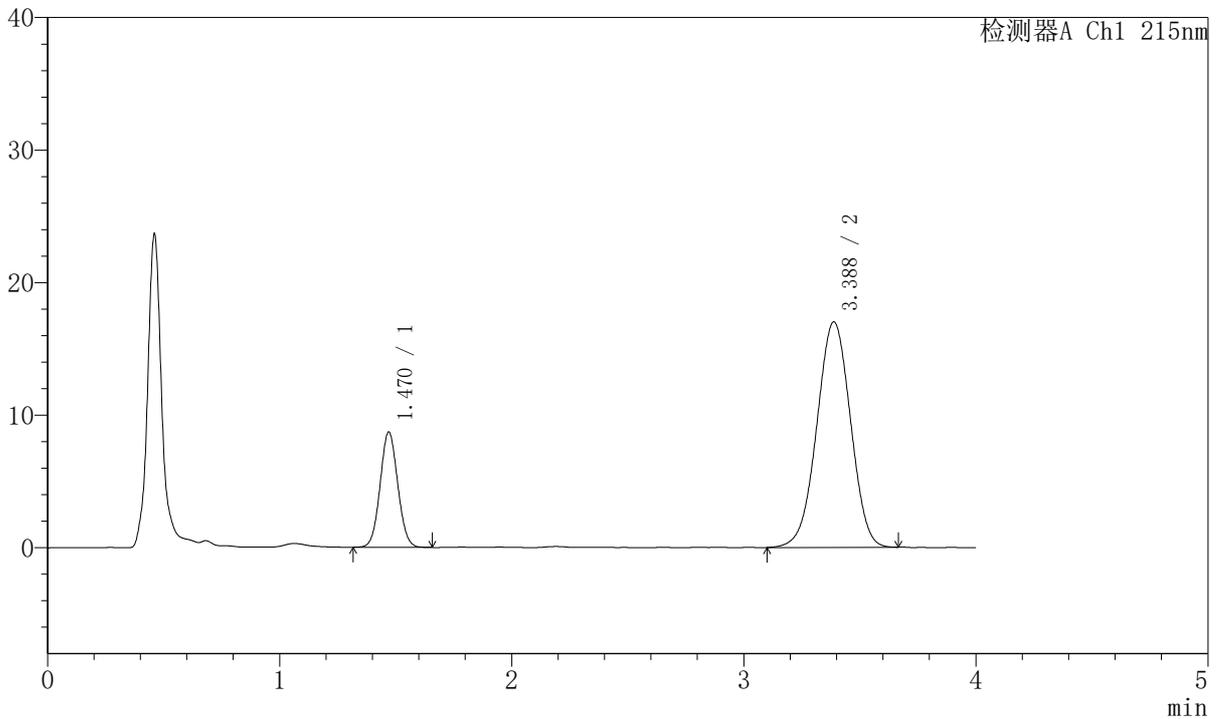

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	46096	21.148	8701	1770	1.058	--
2	3.388	171866	78.852	17012	2578	0.988	9.432
总计		217962	100.000	25712			

图66 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片2
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3744-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 16:32:05 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

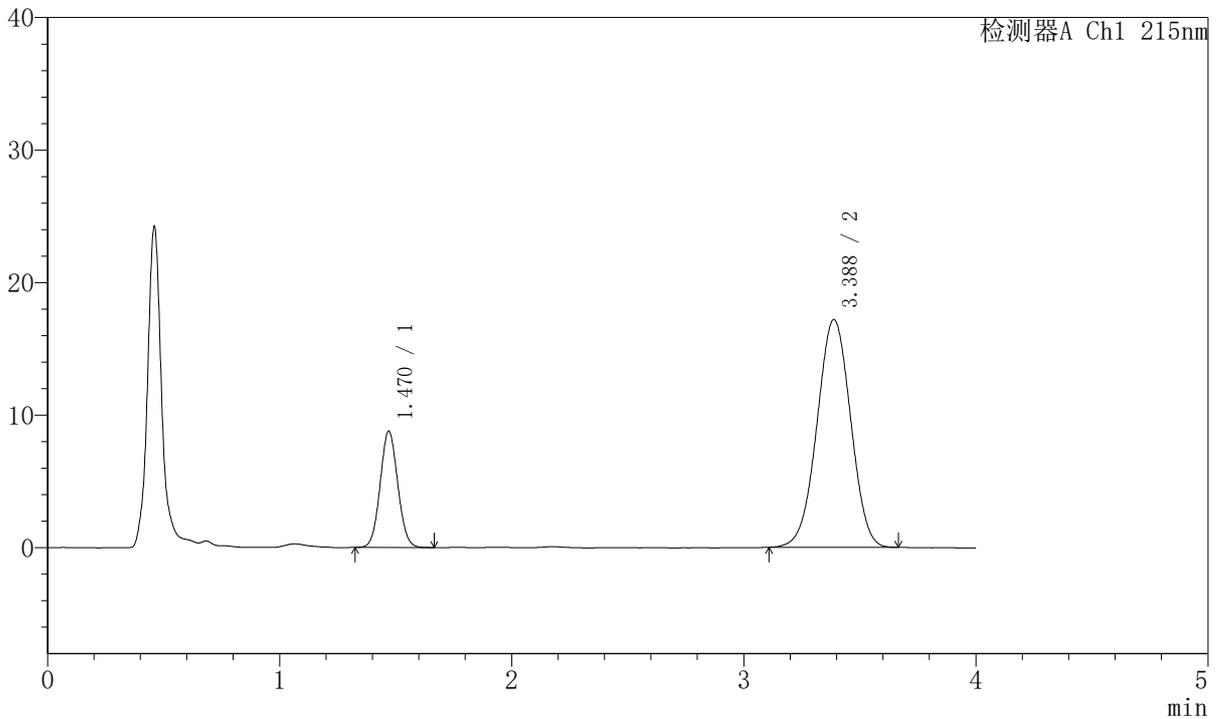

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	46399	21.105	8769	1774	1.062	--
2	3.388	173449	78.895	17189	2585	0.995	9.444
总计		219848	100.000	25958			

图67 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3745-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 16:36:28 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

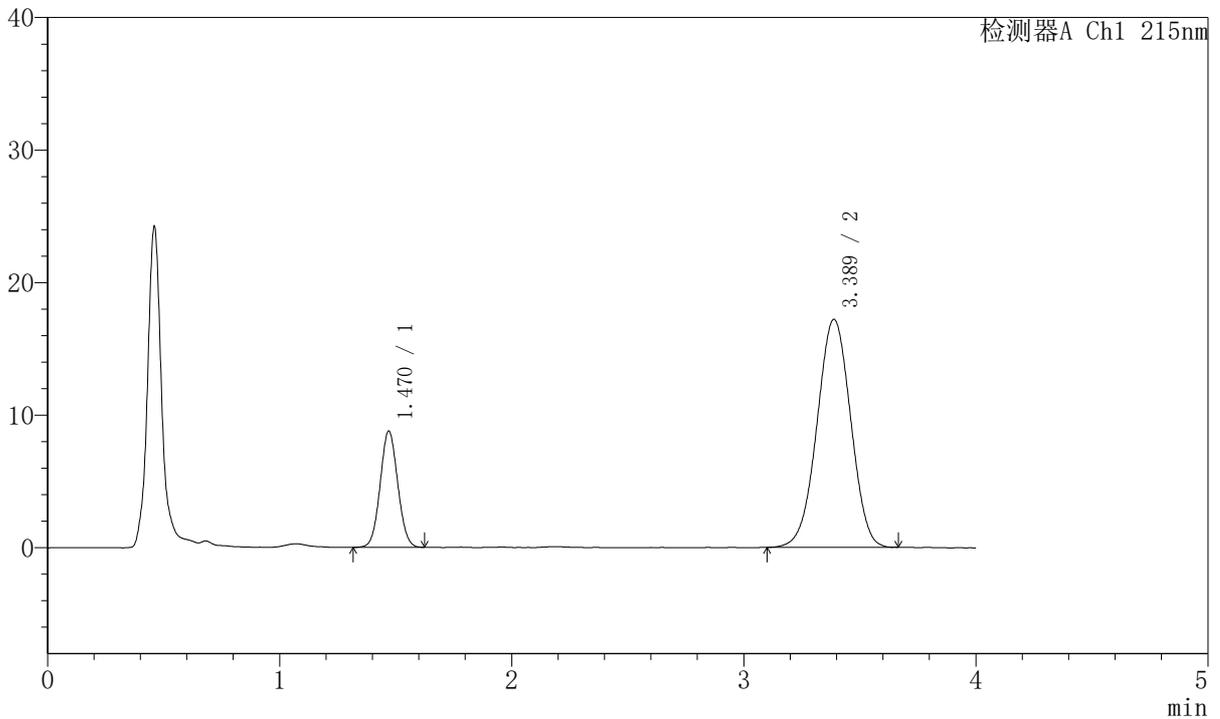

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	46244	21.050	8763	1773	1.055	--
2	3.389	173444	78.950	17199	2581	0.991	9.438
总计		219688	100.000	25962			

图68 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片3
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3746-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 16:40:51 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:09 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

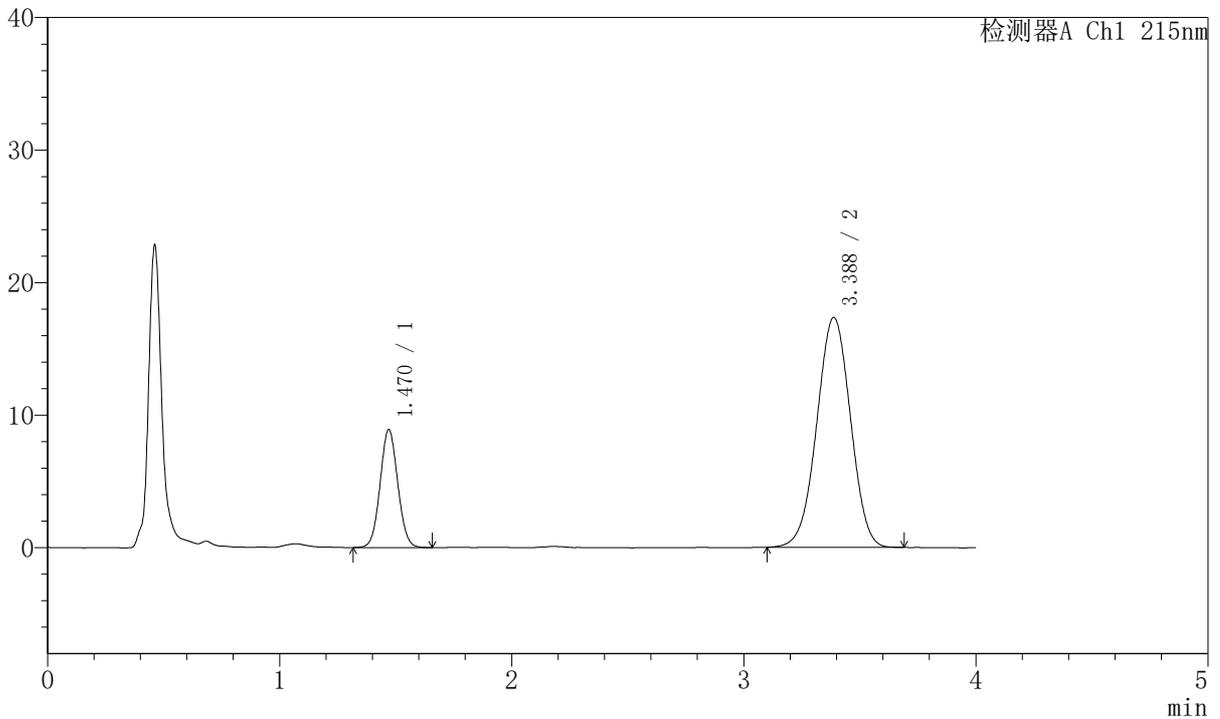

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	47086	21.196	8895	1773	1.059	--
2	3.388	175057	78.804	17348	2588	0.993	9.445
总计		222144	100.000	26244			

图69 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3747-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 16:45:14 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:11 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

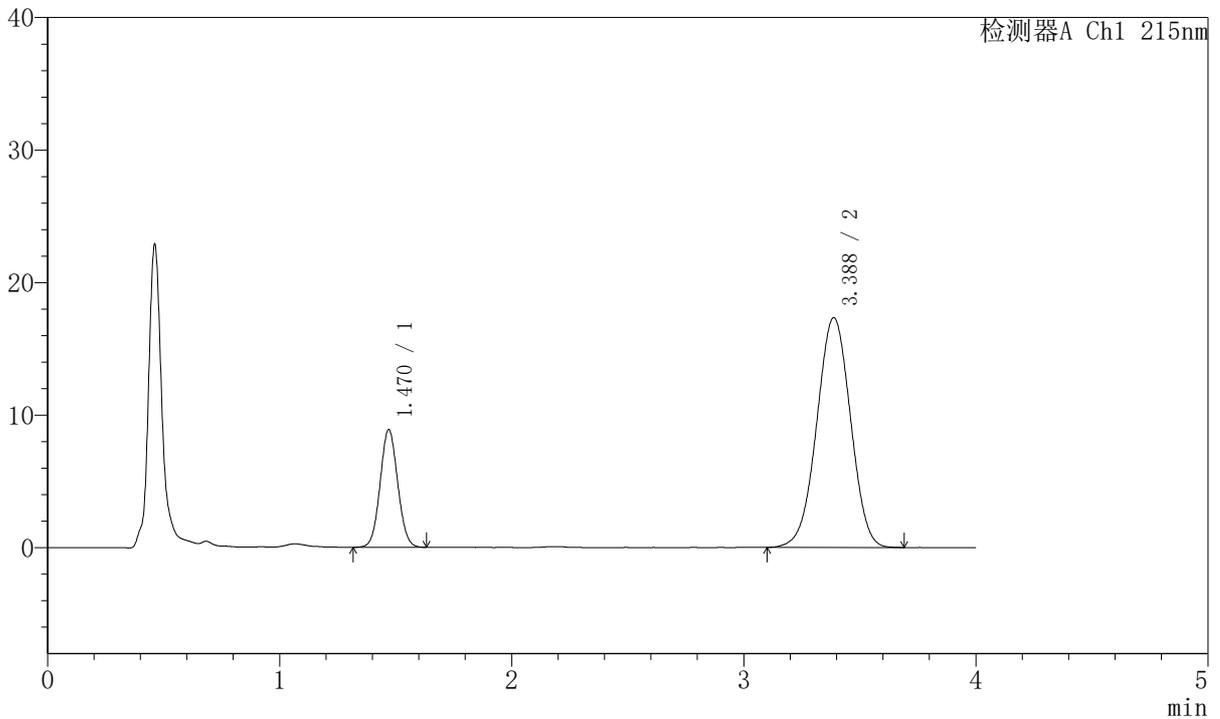

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	46952	21.114	8881	1778	1.058	--
2	3.388	175418	78.886	17341	2581	0.992	9.442
总计		222370	100.000	26221			

图70 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片4
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3748-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 16:49:36 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:14 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

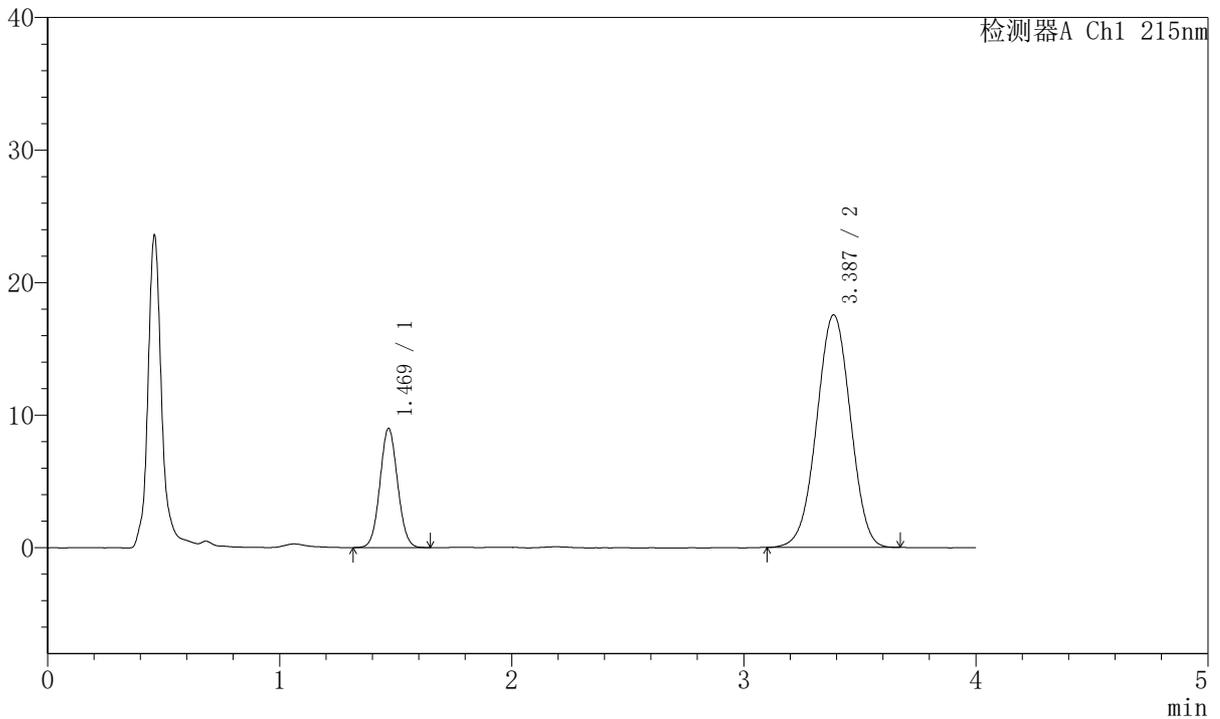

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.469	47555	21.170	8976	1771	1.060	--
2	3.387	177077	78.830	17541	2584	0.992	9.442
总计		224632	100.000	26517			

图71 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3749-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 16:53:59 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:16 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

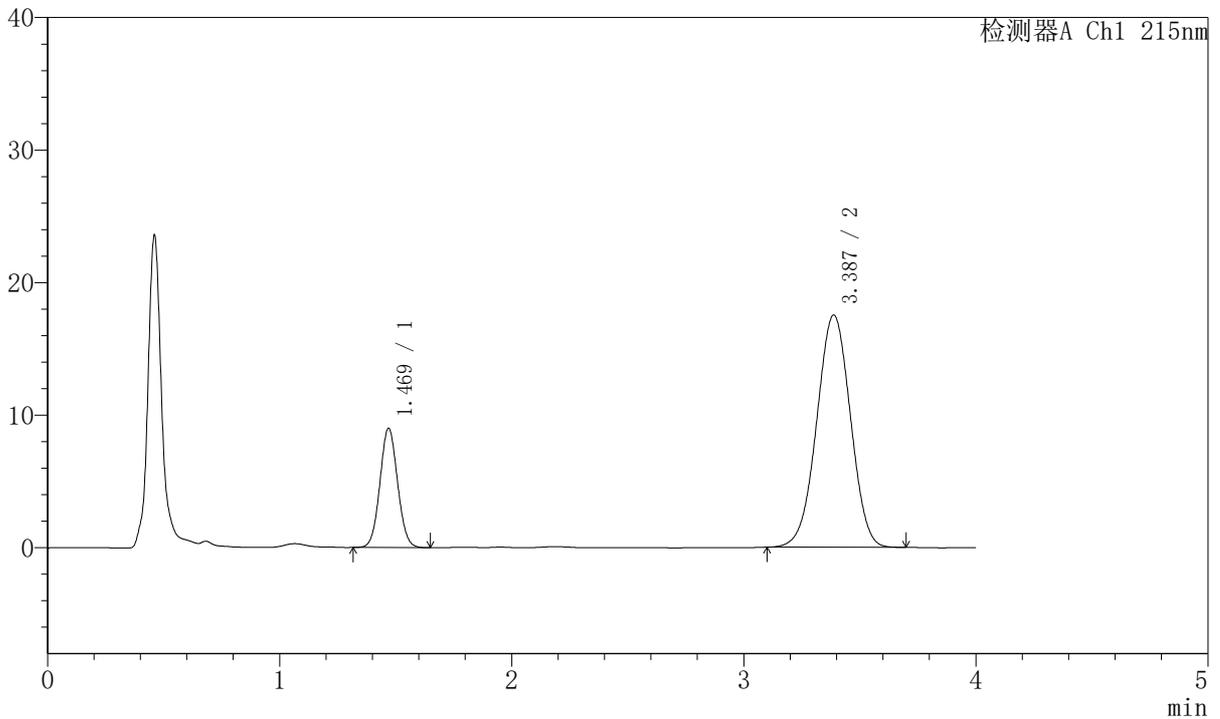

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.469	47553	21.168	8978	1772	1.058	--
2	3.387	177089	78.832	17524	2576	0.993	9.436
总计		224643	100.000	26502			

图72 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片5
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3750-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 16:58:22 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

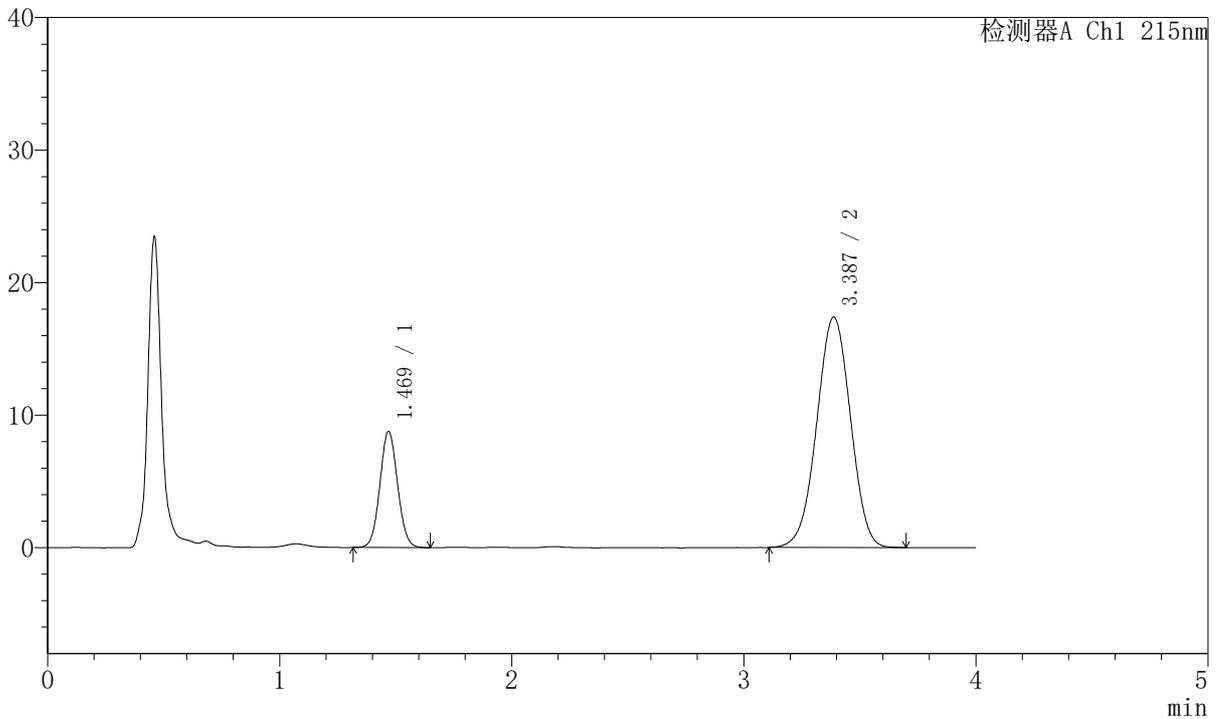

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.469	46426	20.881	8746	1772	1.060	--
2	3.387	175909	79.119	17388	2572	0.991	9.431
总计		222335	100.000	26134			

图73 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3751-2 - zzp-2022081101p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 17:02:43 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

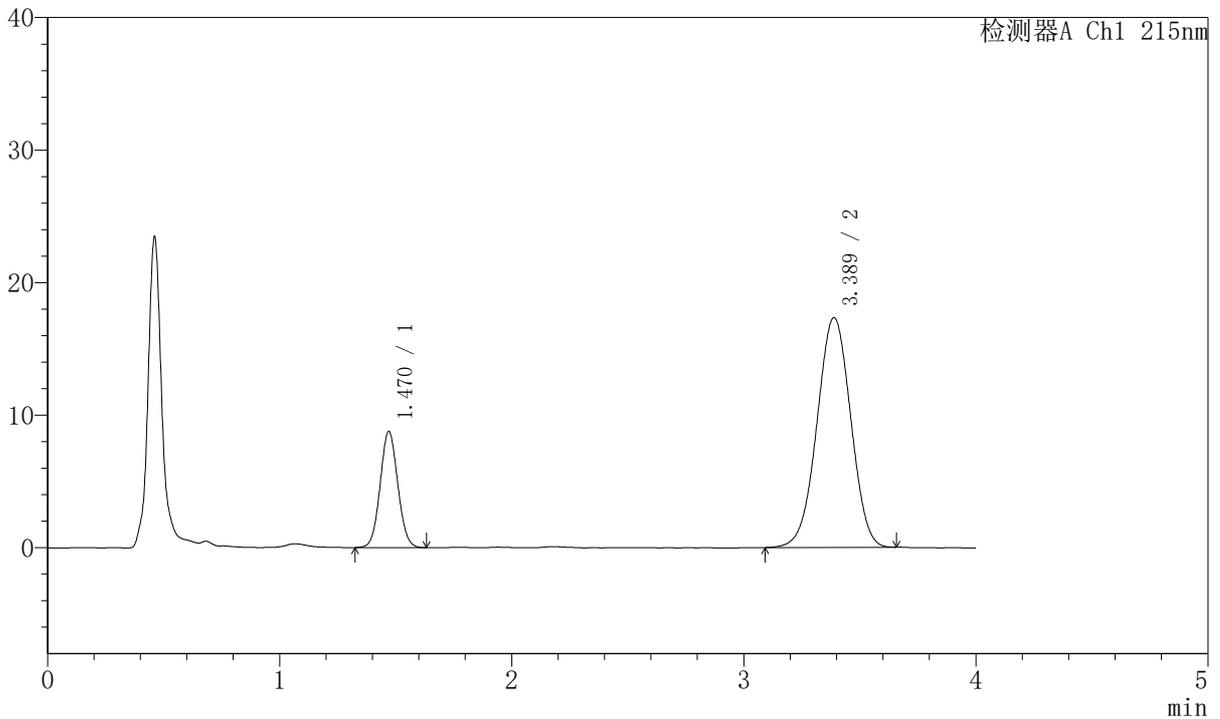

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	46432	20.944	8762	1770	1.060	--
2	3.389	175268	79.056	17338	2571	0.993	9.424
总计		221700	100.000	26100			

图74 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081101批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片6
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3752-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 17:07:06 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

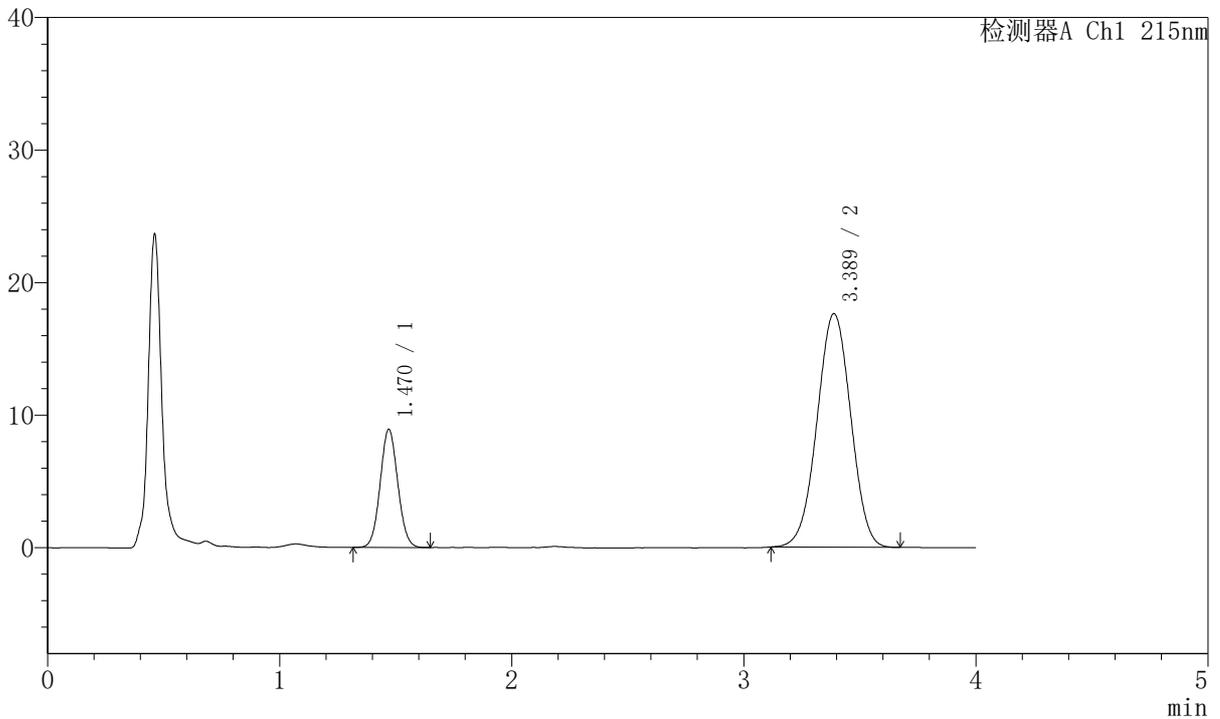

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	47109	20.942	8914	1779	1.061	--
2	3.389	177842	79.058	17618	2581	0.996	9.444
总计		224951	100.000	26533			

图75 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3753-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 17:11:29 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

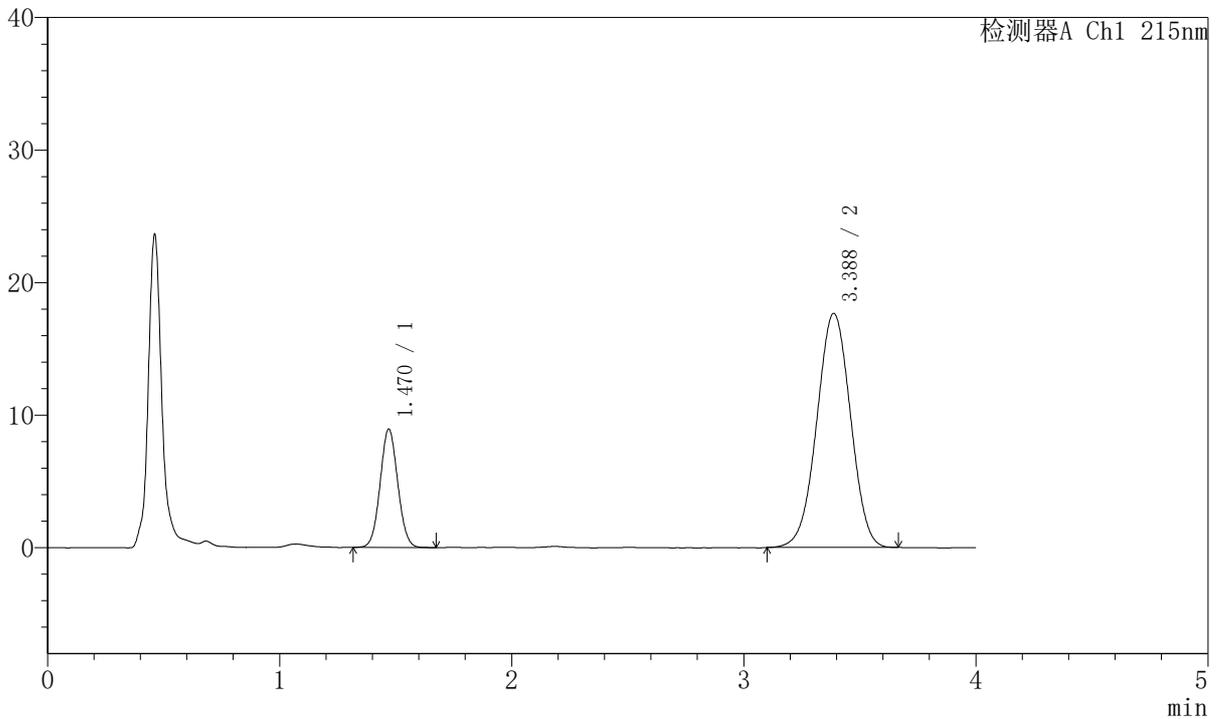

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	47326	20.980	8926	1775	1.057	--
2	3.388	178252	79.020	17659	2591	0.995	9.450
总计		225578	100.000	26585			

图76 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片1
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3754-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 17:15:52 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

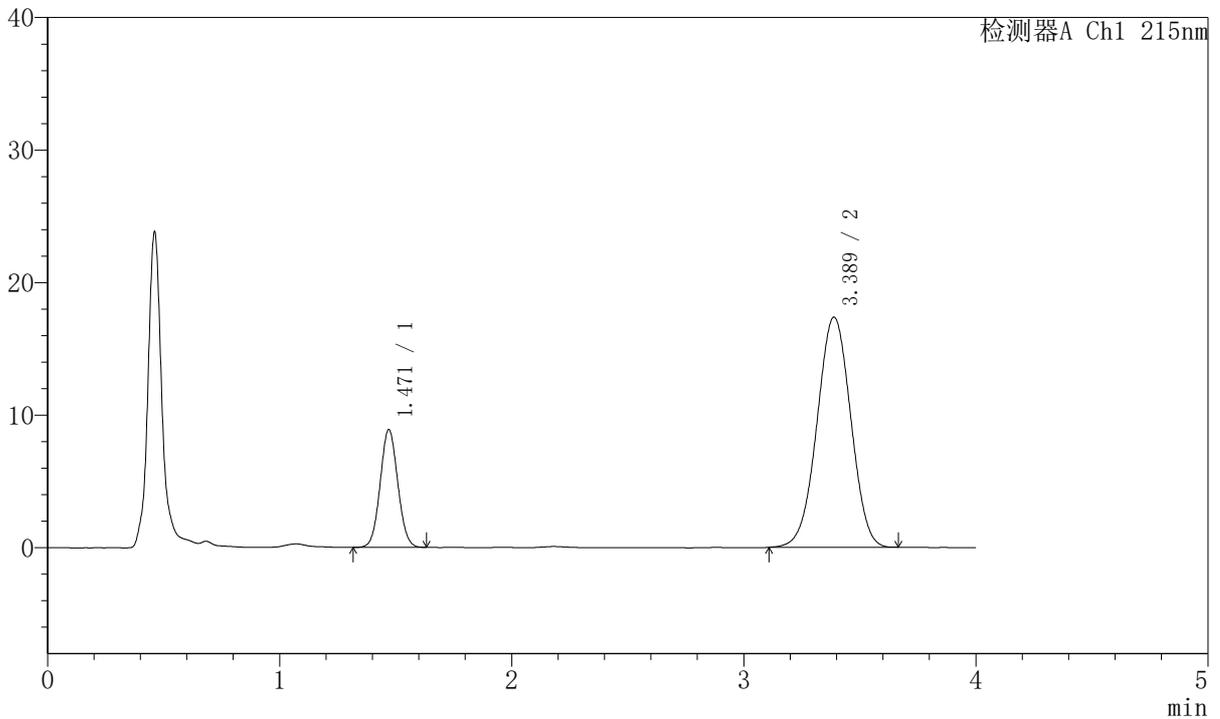

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	47006	21.122	8884	1774	1.056	--
2	3.389	175543	78.878	17362	2581	0.994	9.438
总计		222549	100.000	26246			

图77 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3755-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 17:20:15 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

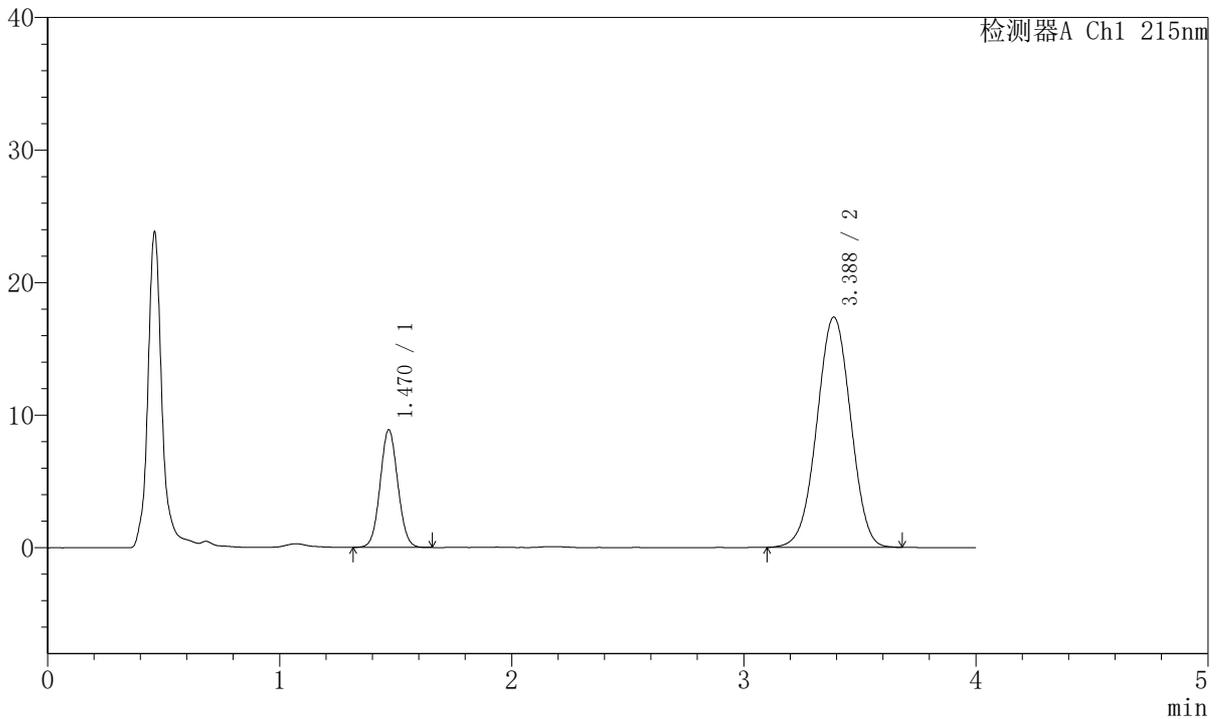

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	47062	21.111	8873	1772	1.057	--
2	3.388	175861	78.889	17371	2573	0.992	9.427
总计		222923	100.000	26245			

图78 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片2
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3756-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 17:24:38 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

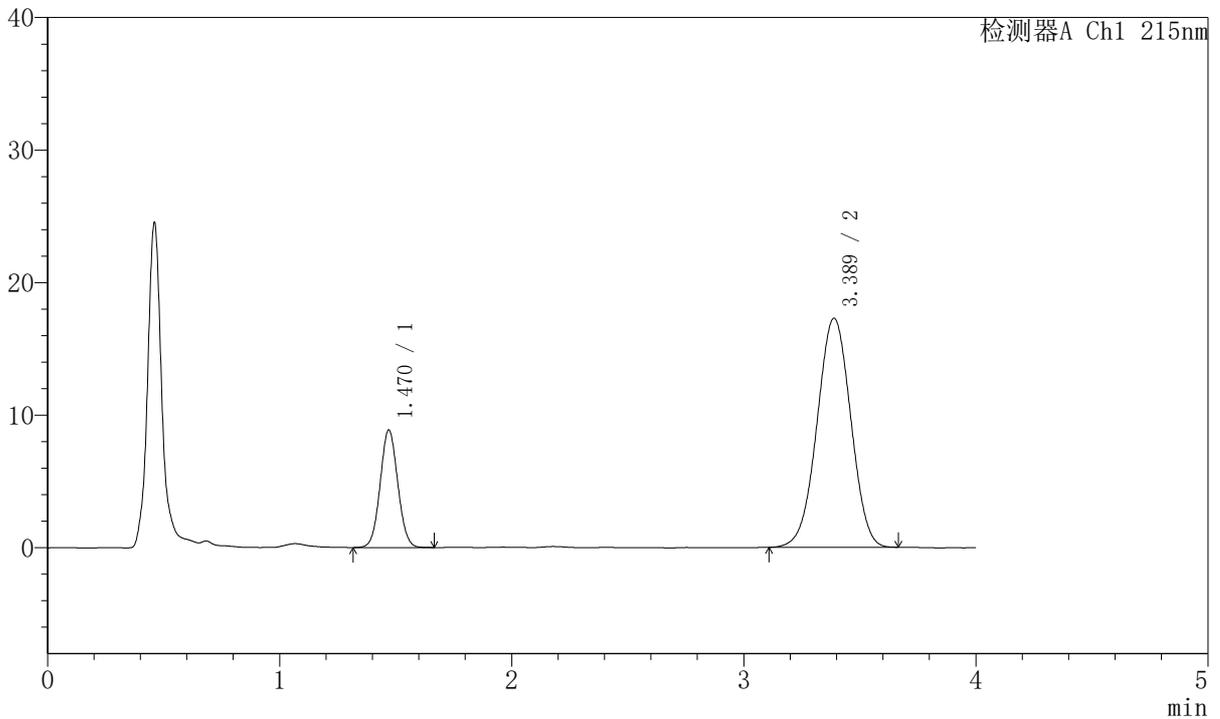

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	46921	21.172	8864	1776	1.055	--
2	3.389	174695	78.828	17285	2583	0.993	9.445
总计		221616	100.000	26149			

图79 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3757-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 17:29:01 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

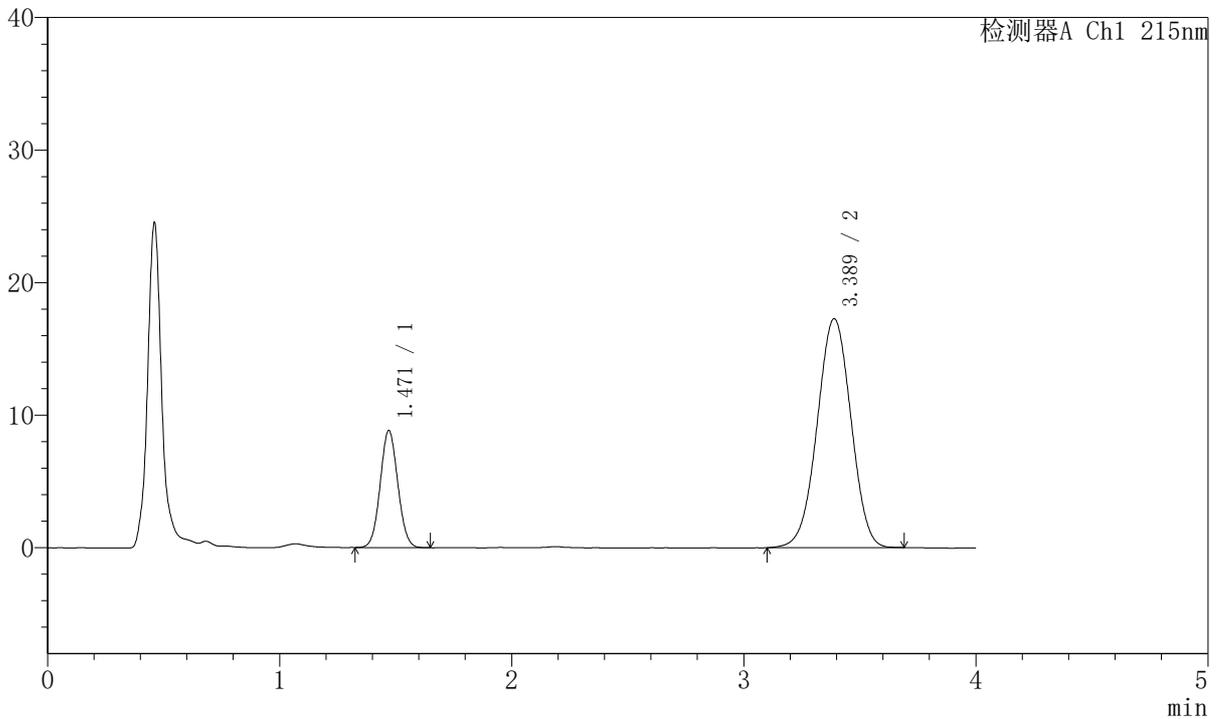

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	46659	21.062	8832	1777	1.058	--
2	3.389	174868	78.938	17273	2575	0.992	9.436
总计		221527	100.000	26105			

图80 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片3
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3758-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 17:33:23 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:39 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

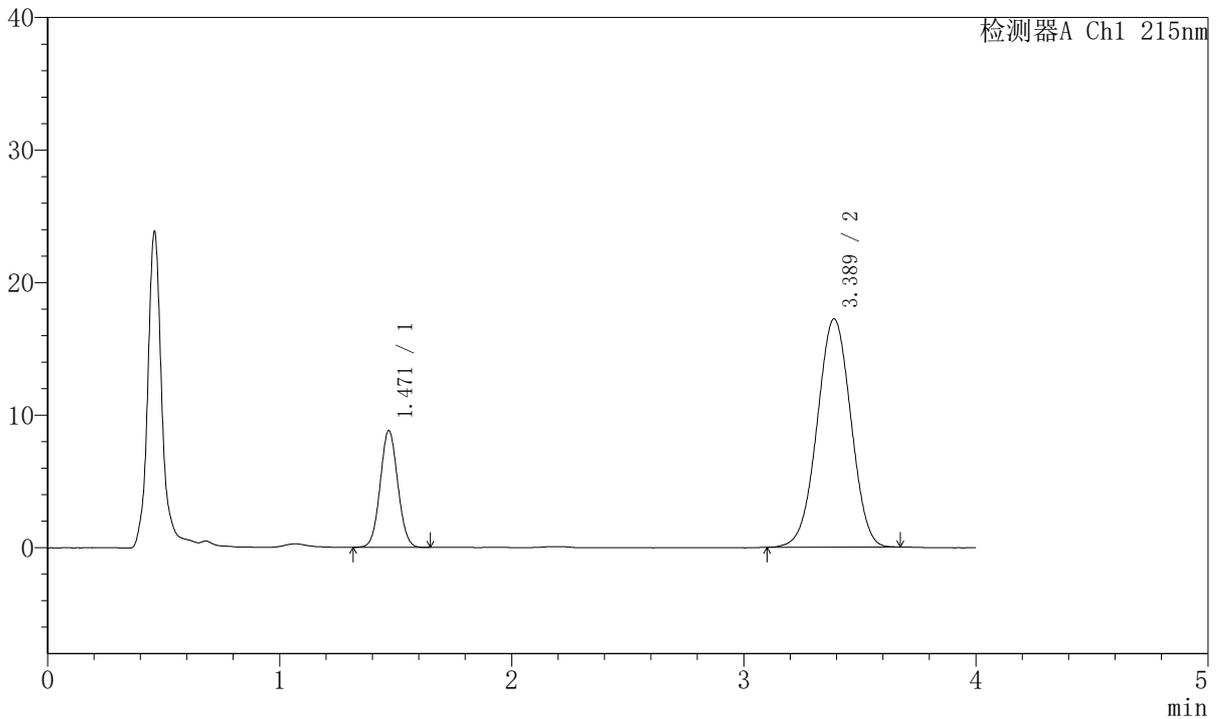

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	46606	21.114	8810	1775	1.054	--
2	3.389	174126	78.886	17225	2582	0.995	9.442
总计		220732	100.000	26035			

图81 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3759-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 17:37:46 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:42 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

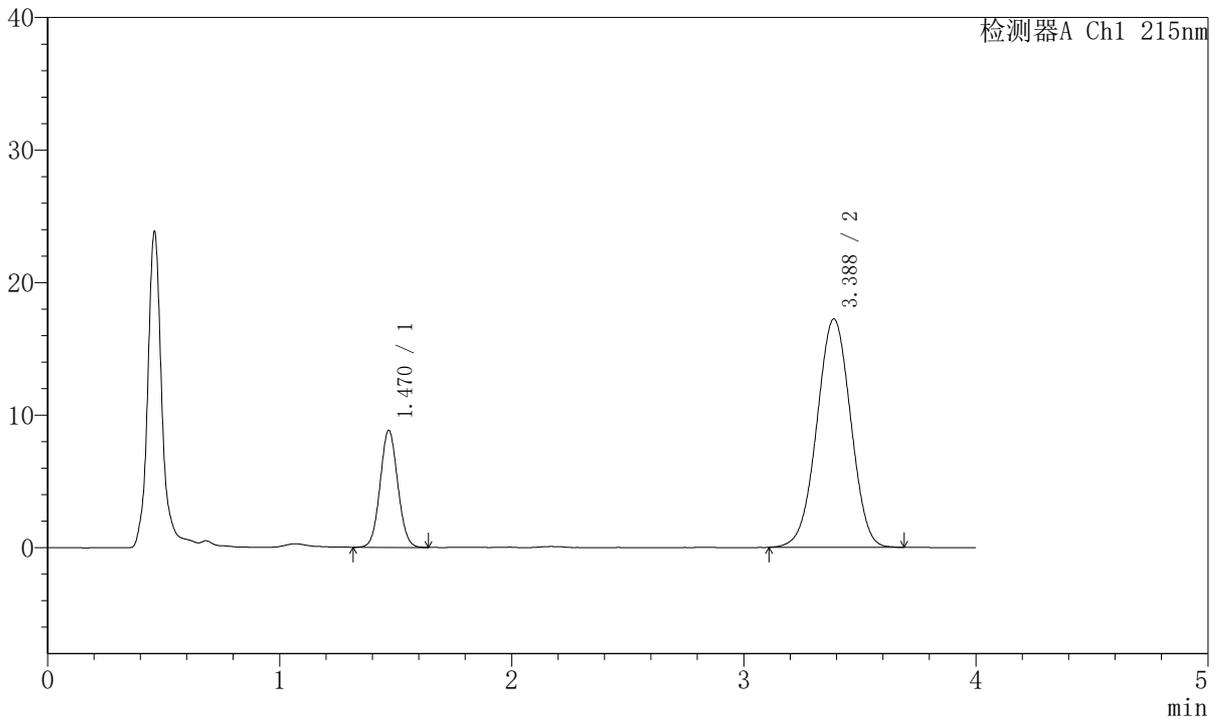

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	46708	21.110	8822	1776	1.059	--
2	3.388	174548	78.890	17231	2569	0.994	9.427
总计		221256	100.000	26052			

图82 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片4
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3760-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 17:42:09 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

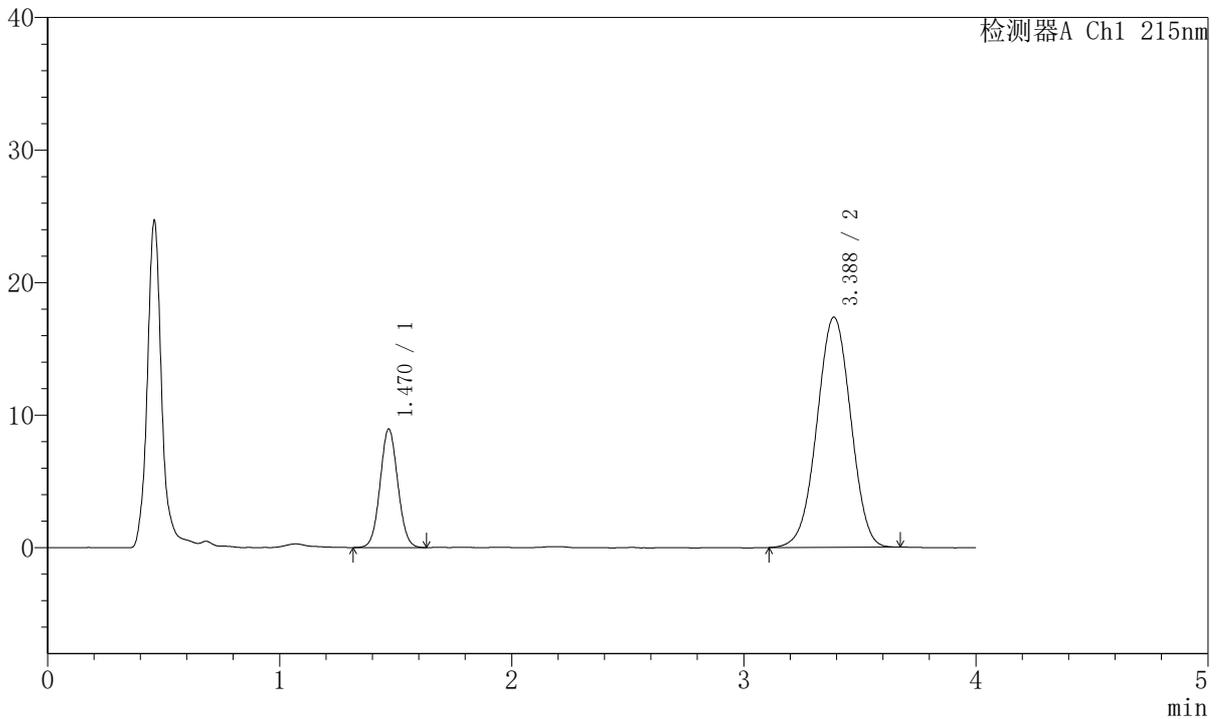

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	47405	21.228	8940	1773	1.057	--
2	3.388	175907	78.772	17370	2571	0.992	9.427
总计		223312	100.000	26310			

图83 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3761-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 17:46:32 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

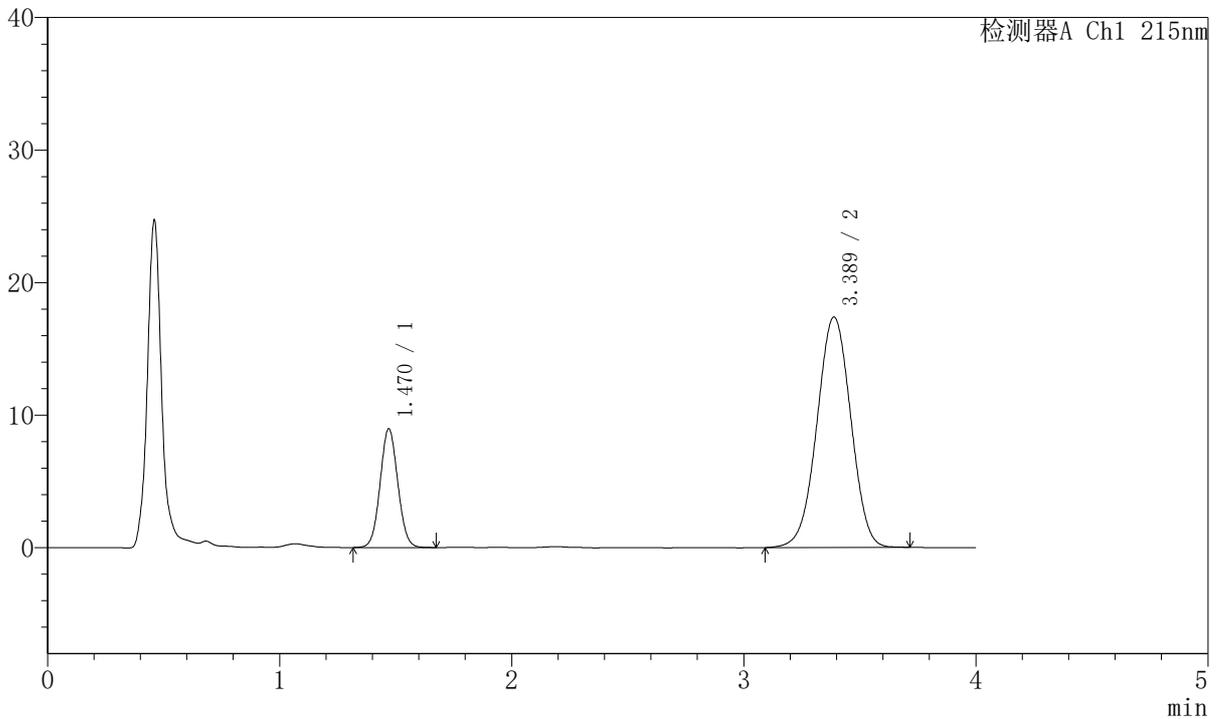

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	47561	21.226	8957	1772	1.056	--
2	3.389	176508	78.774	17394	2568	0.994	9.423
总计		224069	100.000	26352			

图84 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片5
 供试品溶液-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3762-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 17:50:54 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:49 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

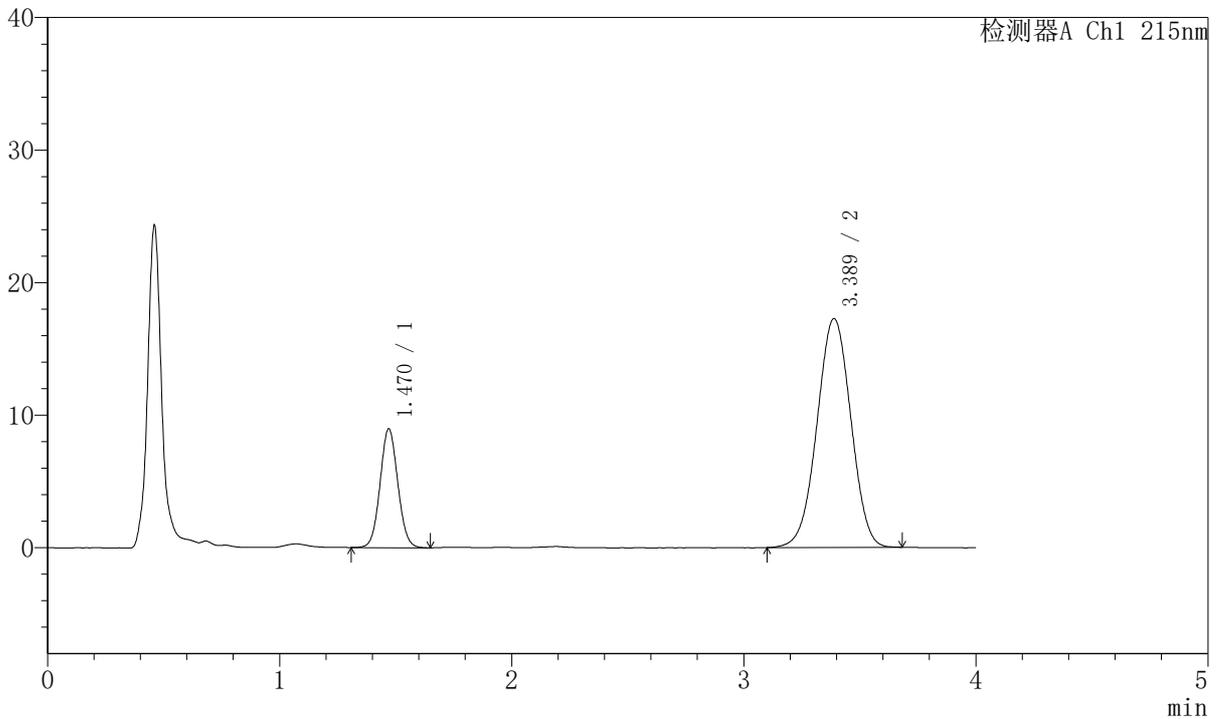

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	47649	21.389	8962	1764	1.062	--
2	3.389	175124	78.611	17267	2557	0.996	9.403
总计		222773	100.000	26229			

图85 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3763-2 - zzp-2022081201p-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 17:55:17 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

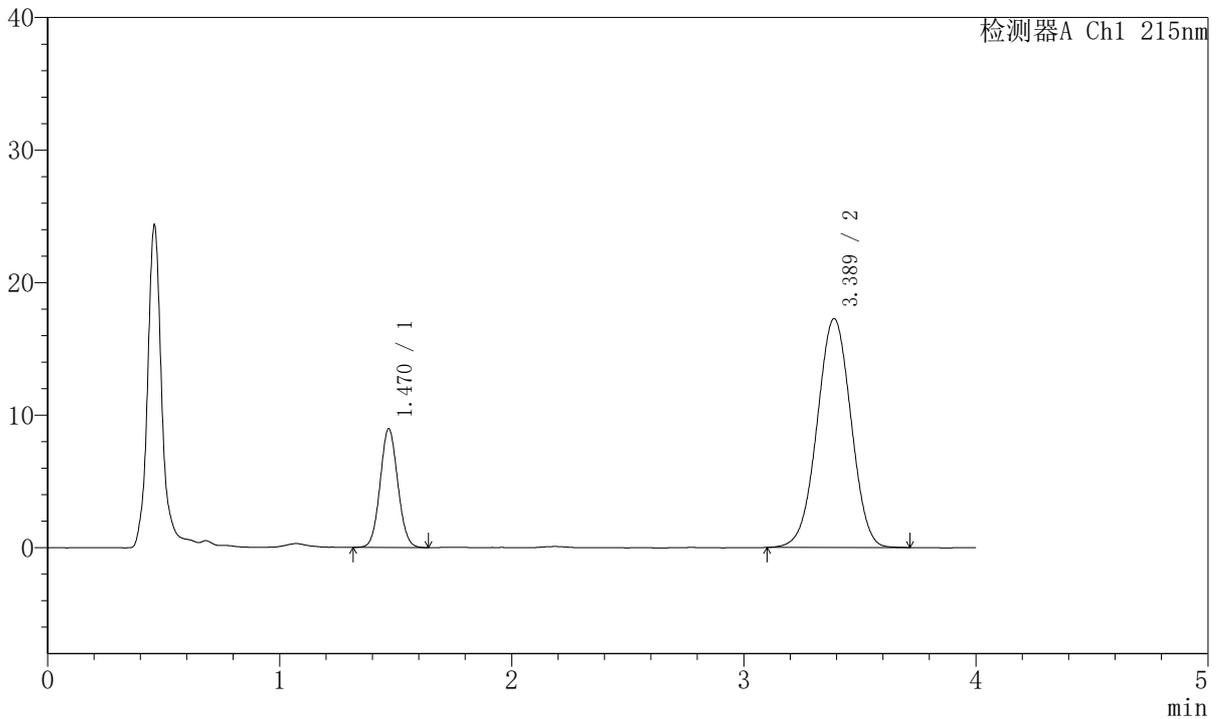

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.470	47417	21.294	8953	1768	1.066	--
2	3.389	175259	78.706	17268	2569	0.997	9.423
总计		222675	100.000	26220			


图86 培哚普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(2022081201批)(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速-片6
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3764-2 - zzp-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 17:59:41 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:55 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

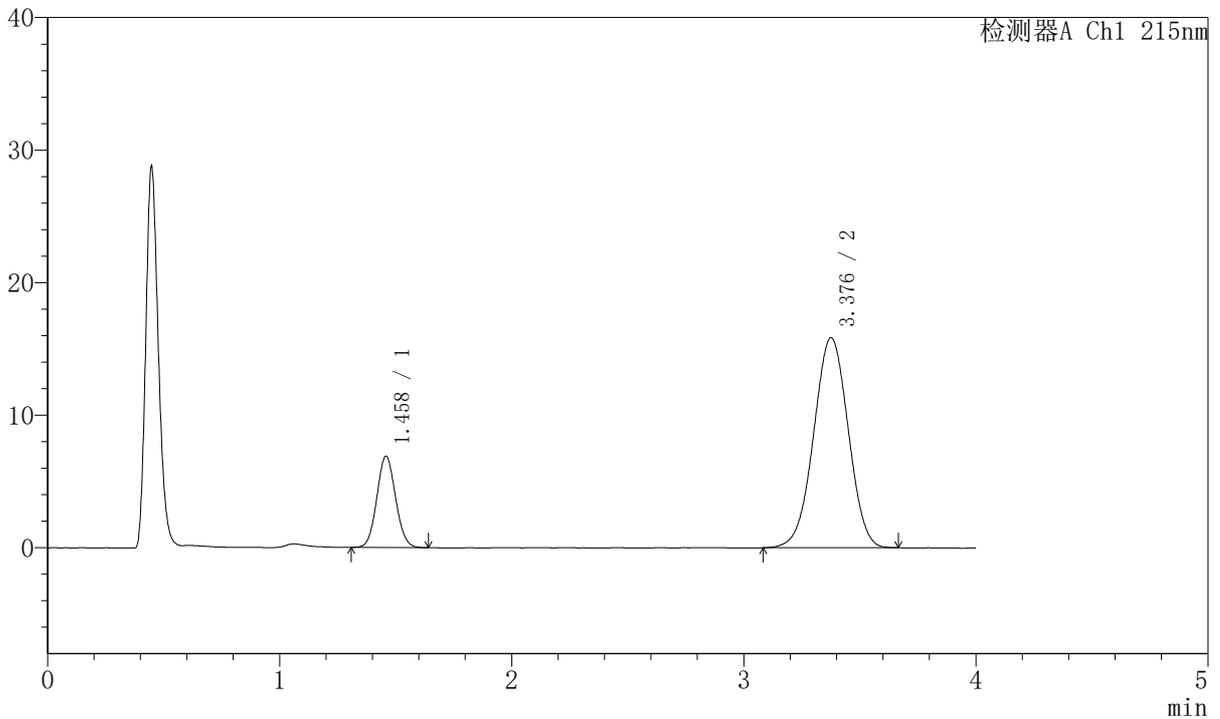

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.458	38823	19.121	6872	1539	1.076	--
2	3.376	164217	80.879	15822	2440	0.995	9.089
总计		203041	100.000	22694			


图87 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:50°C 波长: 215nm
 数据文件名: RC\$J468 - 7-79/7-3765-2 - zzp-cq24y-rcd-jx-10mg10mg-pH2.0jz-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$J468 - J468-rc-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J468 - 20251107-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/07 18:04:04 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2025/11/08 09:37:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV

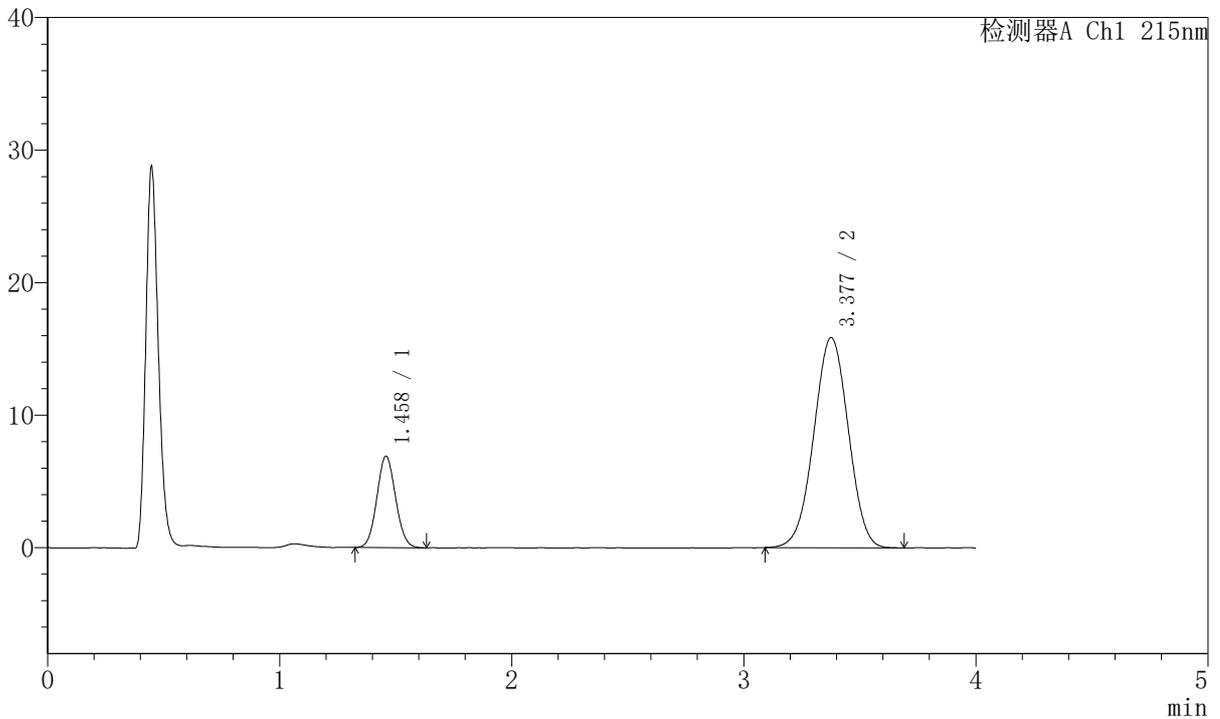

<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数 (USP)	拖尾因子	分离度 (USP)
1	1.458	38766	19.113	6881	1541	1.072	--
2	3.377	164062	80.887	15834	2436	0.997	9.087
总计		202829	100.000	22715			

图88 培哌普利氨氯地平片溶出度测定长期24月HPLC图谱
 自制品(10mg/10mg规格)-pH2.0介质-极限转速
 对照品溶液-2-2