






































































# 999培哌普利叔丁胺片

## <样品信息>

色谱柱 : MPC18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.0ml/min  
 柱温 : 50°C      波长: 215nm  
 数据文件名 : RC\$999 - 0-211/28-4030-3 - zzp-2023091111p-rcqx-1-pH4.5jz-30min-P4.lcd  
 方法文件名 : RC\$999 - 20251203-pdpl-fx277.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX277.lcb  
 样品瓶号 : 3-32      版本号: 6.115  
 进样体积 : 50  $\mu$ l      实验者: wangdan  
 进样时间 : 2025/12/04 00:35:29      处理者: wangdan  
 处理时间 (V3) : 2025/12/04 13:21:33  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>

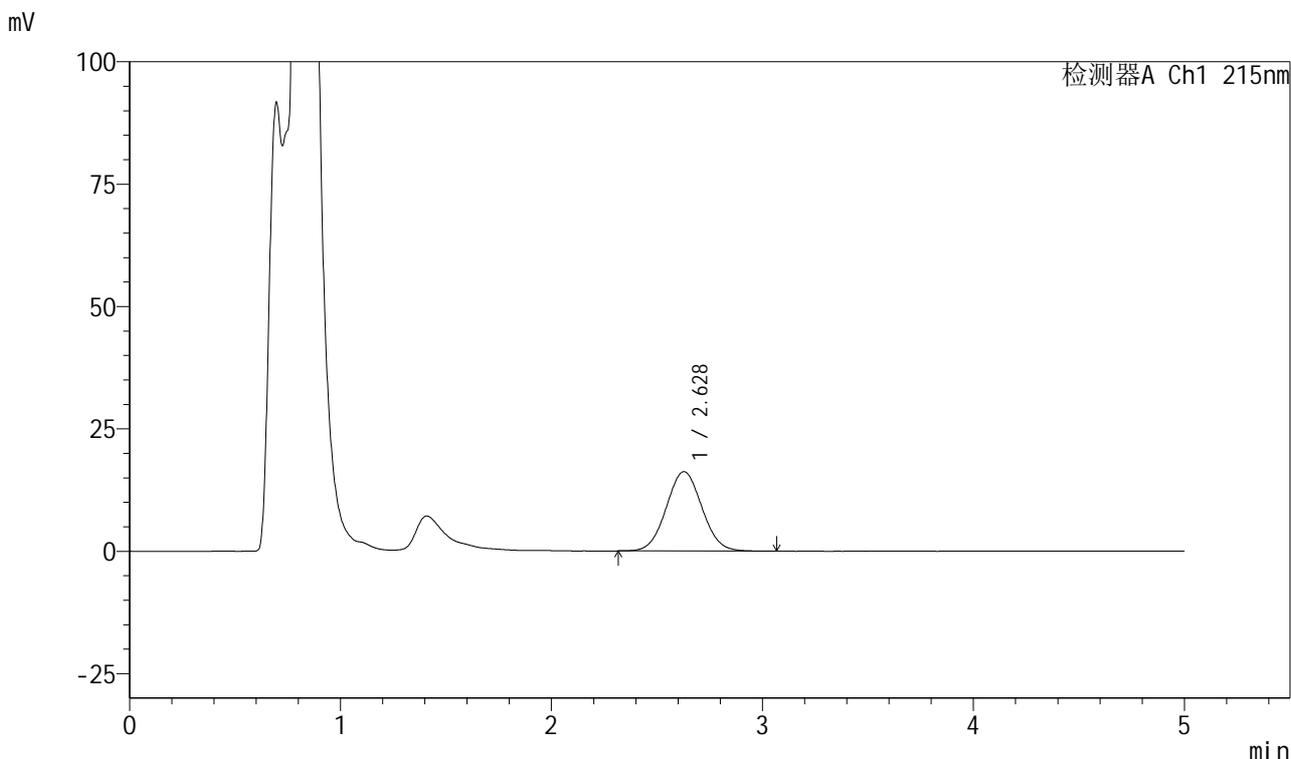

## <峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	190225	100.000	16206	1153	1.044	--
总计		190225	100.000	16206			

图34 培哌普利叔丁胺溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2023091111批-pH4.5介质-30min-片4  
 供试品溶液-1












# 999培哌普利叔丁胺片

## <样品信息>

色谱柱 :MP C18(50\*4.6mm,5μm)                      流速:1.0ml/min  
 柱温 :50°C    波长: 215nm  
 数据文件名 :RC\$999 - 0-211/28-4035-3 - zzp-2023091111p-rcqx-2-pH4.5jz-rj.lcd  
 方法文件名 :RC\$999 - 20251203-pdpl-fx277.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX277.lcb  
 样品瓶号 :4-9  
 进样体积 :50 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 :2025/12/04 01:02:34                      实验者: wangdan  
 处理时间 (V3) :2025/12/04 13:21:51                      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>

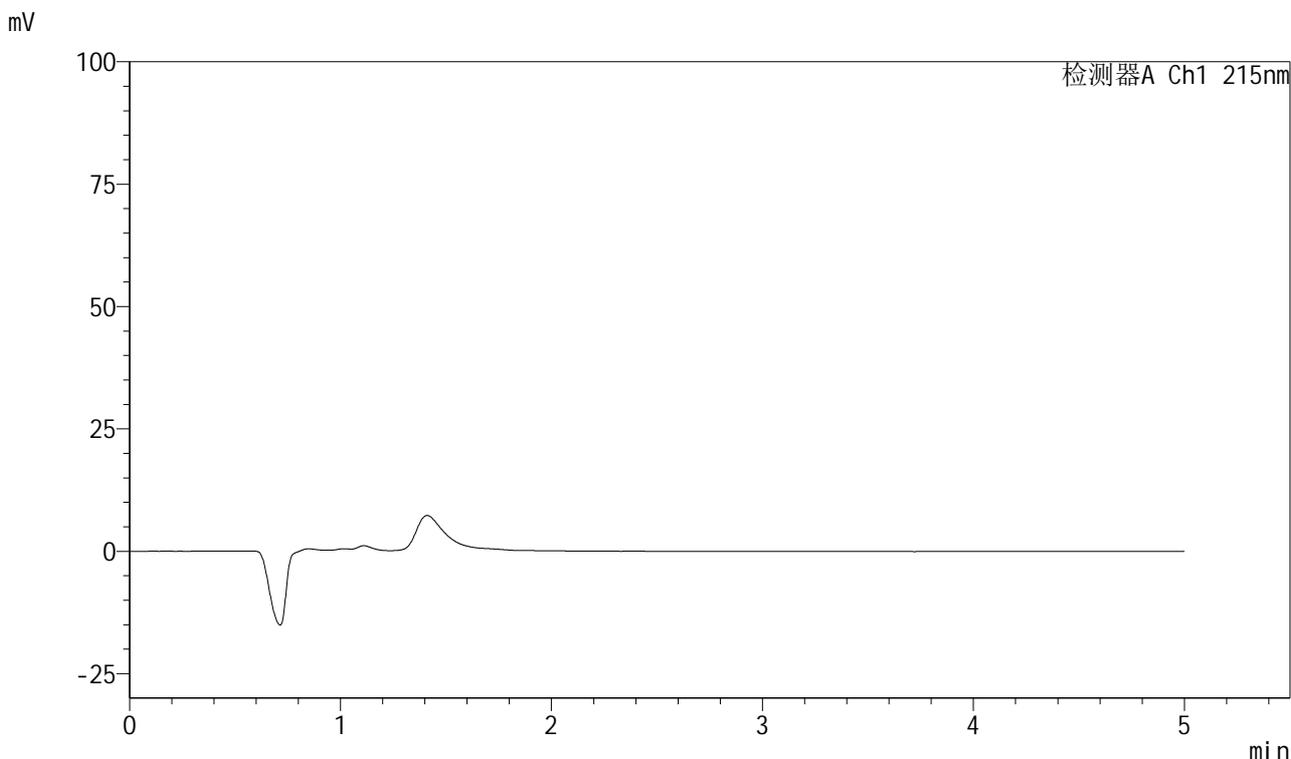

## <峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图39 培哌普利叔丁胺溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-2023091111批-pH4.5介质  
溶剂












# 999培哌普利叔丁胺片

## <样品信息>

色谱柱 :MP C18(50*4.6mm,5μm)	流速:1.0ml/min
柱温 :50°C	波长: 215nm
数据文件名 :RC\$999 - 0-211/28-4040-3 - zzp-2023091111p-rcqx-2-pH4.5jz-dz1-5.lcd	
方法文件名 :RC\$999 - 20251203-pdpl-fx277.lcm	
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX277.lcb	
样品瓶号 :4-18	版本号: 6.115
进样体积 :50 μl	实验者: wangdan
进样时间 :2025/12/04 01:29:47	处理者: wangdan
处理时间 (V3) :2025/12/04 13:22:09	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)	

## <色谱图>

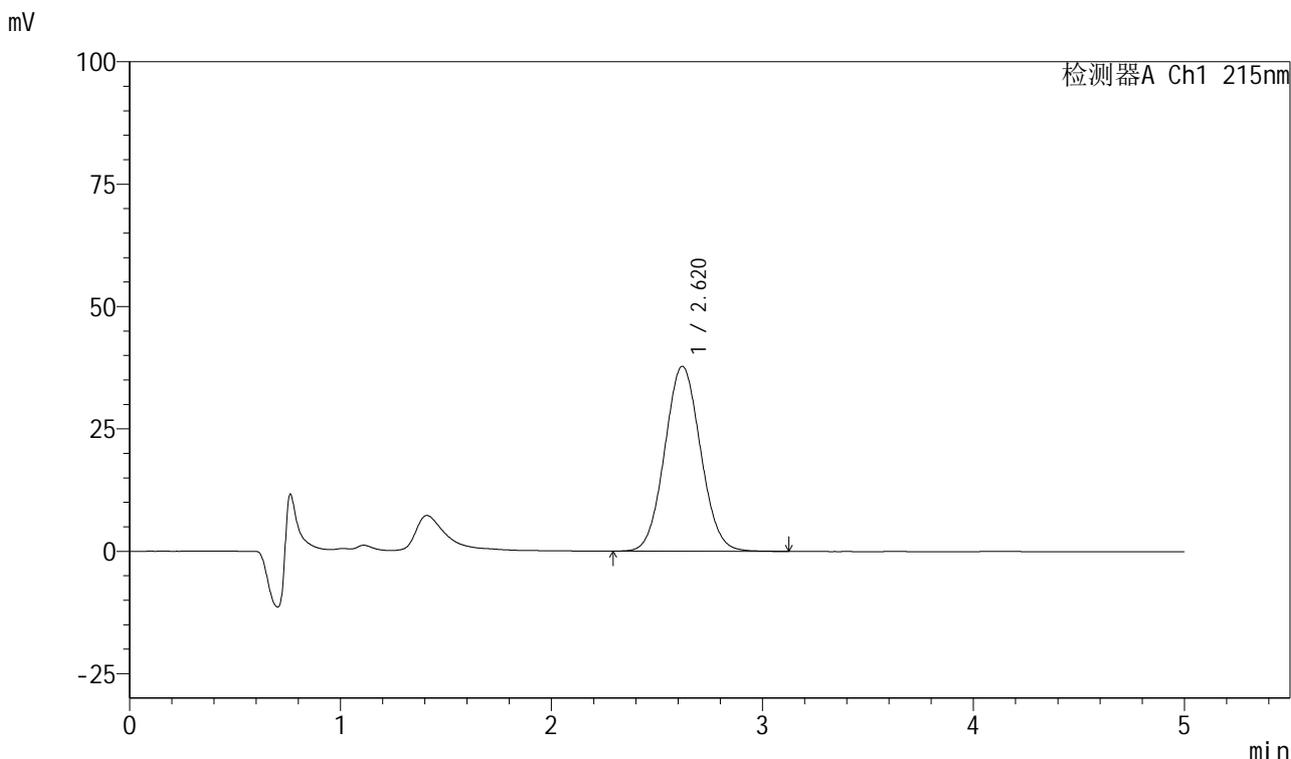

## <峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.620	446074	100.000	37788	1134	1.060	--
总计		446074	100.000	37788			

图44 培哌普利叔丁胺溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-2023091111批-pH4.5介质  
对照品溶液-1-5
































# 999培哌普利叔丁胺片

## <样品信息>

色谱柱 : MPC18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.0ml/min  
 柱温 : 50 $^{\circ}$ C      波长: 215nm  
 数据文件名 : RC\$999 - 0-211/28-4055-3 - zzp-2023091111p-rcqx-2-pH4.5jz-15min-P3.lcd  
 方法文件名 : RC\$999 - 20251203-pdpl-fx277.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX277.lcb  
 样品瓶号 : 4-21  
 进样体积 : 50  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2025/12/04 02:51:01      实验者: wangdan  
 处理时间 (V3) : 2025/12/04 13:23:07      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>

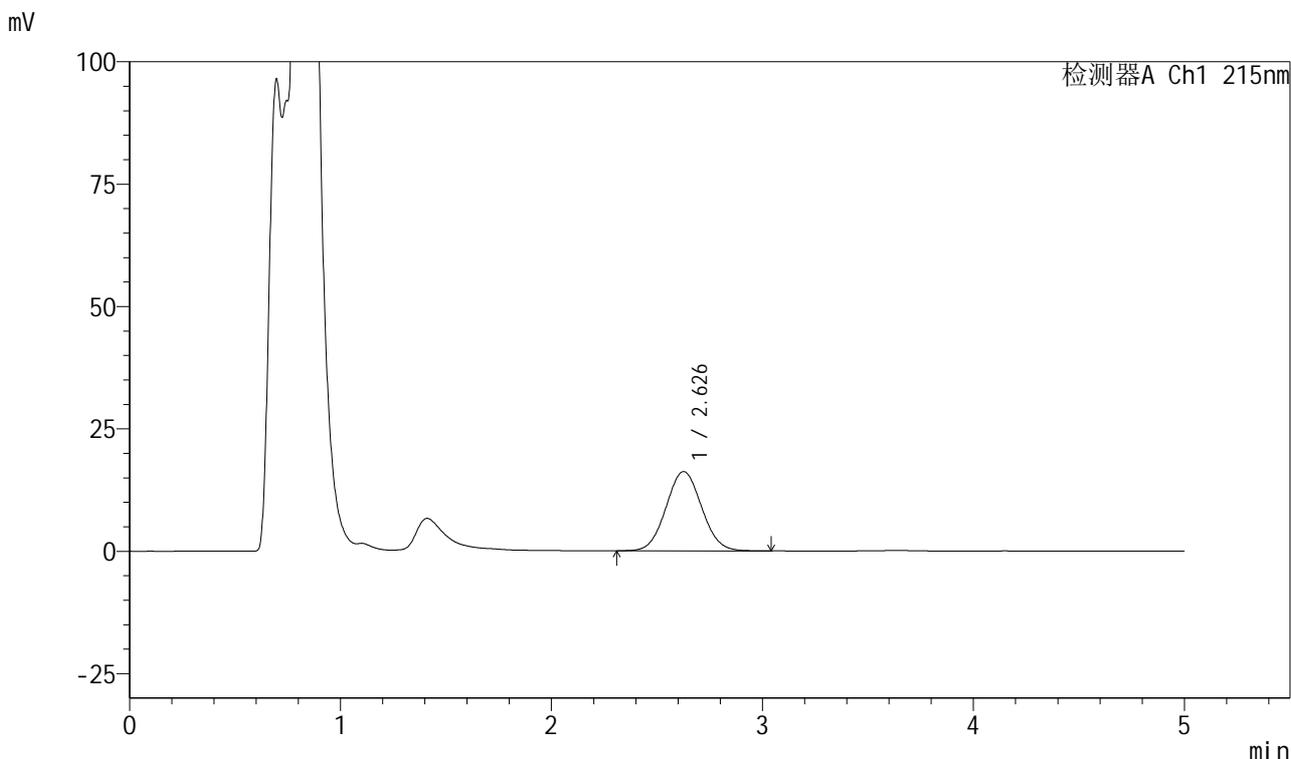

## <峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	190159	100.000	16190	1150	1.049	--
总计		190159	100.000	16190			

图59 培哌普利叔丁胺溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2023091111批-pH4.5介质-15min-片3  
 供试品溶液-1


























# 999培哌普利叔丁胺片

## <样品信息>

色谱柱 :MP C18(50\*4.6mm,5μm)                      流速:1.0ml/min  
 柱温 :50°C    波长: 215nm  
 数据文件名 :RC\$999 - 0-211/28-4067-3 - zzp-2023091111p-rcqx-2-pH4.5jz-30min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$999 - 20251203-pdpl-fx277.lcm  
 批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX277.lcb  
 样品瓶号 :4-23  
 进样体积 :50 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 :2025/12/04 03:56:03                      实验者: wangdan  
 处理时间 (V3) :2025/12/04 13:23:52                      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>

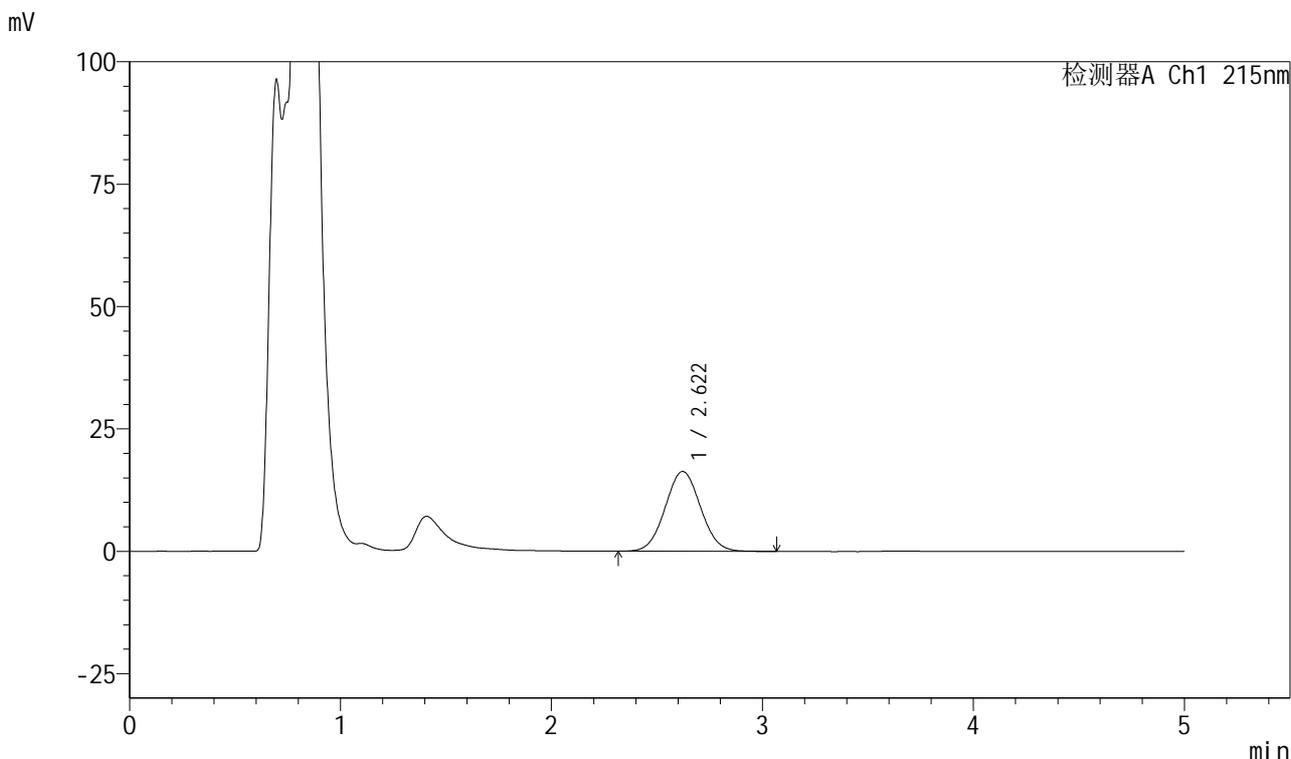

## <峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	190185	100.000	16313	1160	1.044	--
总计		190185	100.000	16313			

图71 培哌普利叔丁胺溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2023091111批-pH4.5介质-30min-片3  
 供试品溶液-1






# 999培哌普利叔丁胺片

## <样品信息>

色谱柱 : MPC18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C	波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-211/28-4069-3 - zzp-2023091111p-rcqx-2-pH4.5jz-30min-P5.lcd	
方法文件名 : RC\$999 - 20251203-pdpl-fx277.lcm	
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX277.lcb	
样品瓶号 : 4-41	版本号: 6.115
进样体积 : 50 μl	实验者: wangdan
进样时间 : 2025/12/04 04:06:54	处理者: wangdan
处理时间 (V3) : 2025/12/04 13:23:58	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)	

## <色谱图>

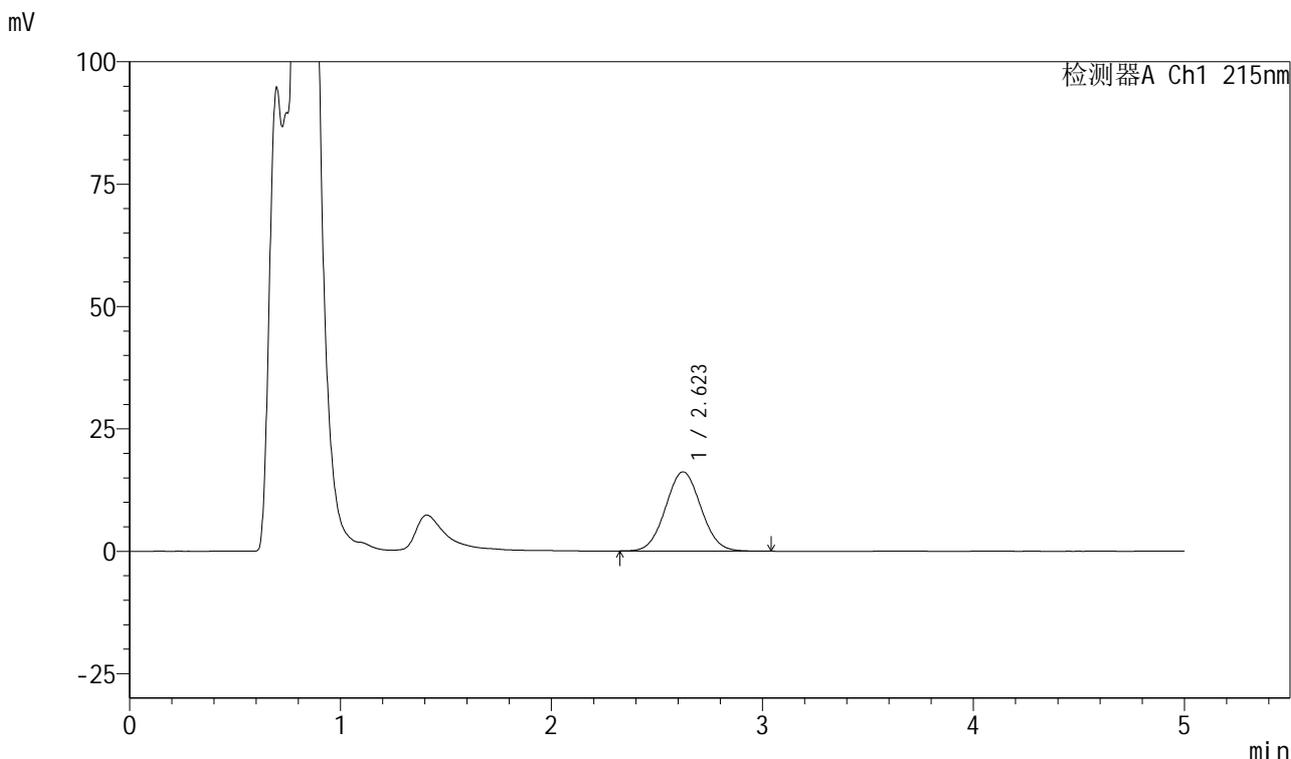

## <峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	188576	100.000	16188	1166	1.045	--
总计		188576	100.000	16188			

图73 培哌普利叔丁胺溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-2023091111批-pH4.5介质-30min-片5  
供试品溶液-1





